

Vac-Lok™ Vacuum Compressors

INSTRUCTIONS FOR USE (IFU)



INTENDED USE

Device is intended to inflate and/or deflate Vac-Lok™ cushions.


 **WARNING**

- Users of this product have an obligation and responsibility to provide the highest degree of safety hazard control to co-workers and themselves. To avoid safety hazards, wear all recommended protective equipment and follow safety control policies established by your facility.
- Routinely check vacuum compressors and power cords for signs of deterioration.
- Do not use if device appears damaged.
- Do not cover ventilation openings.
- Do not attempt to service device.

NOTE: Place female valve connector onto cushion valve to let air into Vac-Lok™ cushion without using pump.


SETTING UP SINGLE FUNCTION VAC-LOK™ VACUUM COMPRESSOR

1. Verify Vac-Lok™ Vacuum Compressor's ON/OFF switch is OFF and unit is unplugged from power source.
2. Remove tape from ports on compressor.

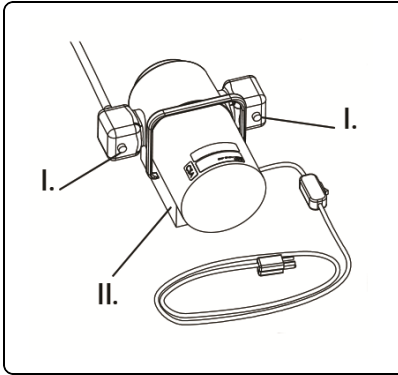

I. Pump Port
II. Pump/Compressor

3. Attach mufflers to ports.

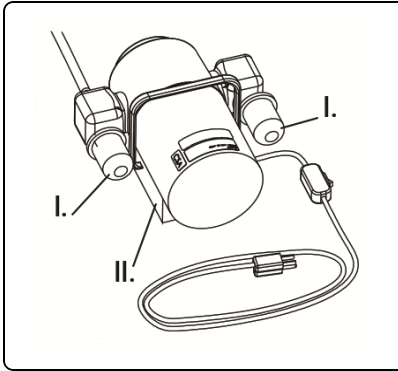


I. Muffler
II. Pump/Compressor

USING SINGLE FUNCTION VAC-LOK™ VACUUM COMPRESSOR

NOTE: Voltage requirements: MT-VL-1A: 110 V / 8 A 60 Hz

1. Verify Vac-Lok™ Vacuum compressor's ON/OFF switch is OFF.
2. Plug power cord into appropriate GFCI (ground fault circuit interrupter) receptacle.
3. Attach vacuum hose to cushion valve (*refer to Vac-Lok™ Cushion manual*).

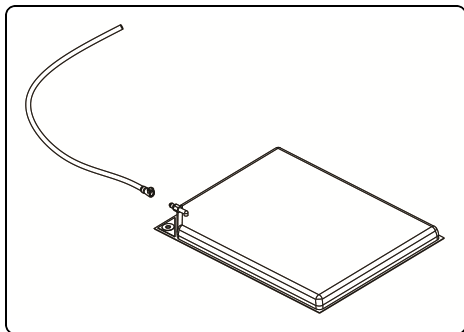

4. Press ON/OFF switch until most air is drawn from cushion.
5. Verify vacuum's ON/OFF switch is OFF.
6. Disconnect vacuum hose from Vac-Lok™ cushion.

REPROCESSING

1. Clean device with a mild, non-abrasive cleaner as needed.

MAINTENANCE

NOTE: Inspect device prior to use for signs of damage and general wear.

DISPOSAL



WARNING

- *Device should be disposed of in manner appropriate for electronic equipment.*

预期用途

该装置用于对Vac-Lok™气垫充气 and/或放气。


**警告**

- 本产品的用户有义务和责任采取最严格的安全风险控制措施，避免同事和本人受伤。为了避免安全风险，应佩戴所有建议的保护装备，并遵守所在机构制定的安全控制规定。
- 定期检查真空压缩机及电源线是否存在损坏迹象。
- 如果设备有损坏迹象，请勿使用。
- 切勿遮盖通气开口。
- 切勿试图维修器械。


注意：将母头阀门接头安装在垫子的阀门上，以使空气进入垫子而不需使用气泵。

设置单功能VAC-LOK™真空压缩机

1. 确认Vac-Lok™真空压缩机的 ON/OFF (开启/关闭) 开关处于 OFF (关闭) 位置且单元已从电源上拔开。
2. 从压缩机端口上卸下胶带。

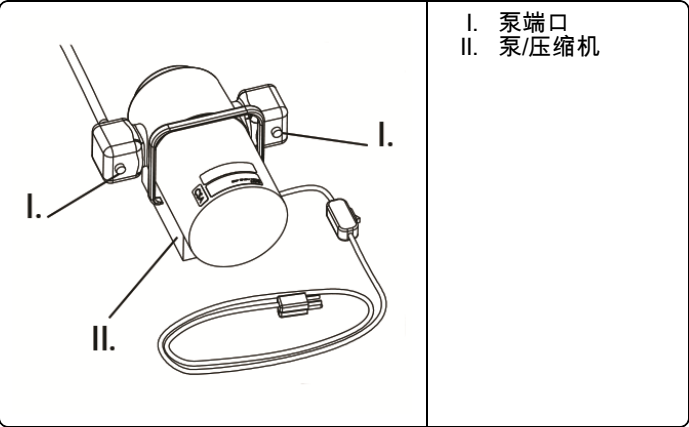


3. 将消声器连接到端口。

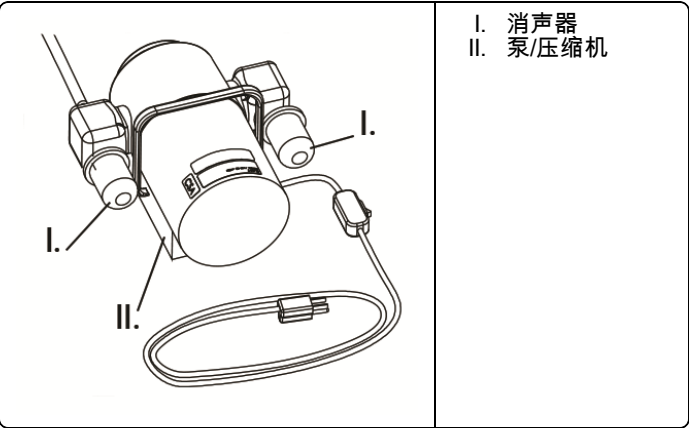

使用单功能VAC-LOK™ 真空压缩机

注意: 电压要求: MT-VL-1A: 110 V / 8 A 60 Hz

1. 确认 Vac-Lok™ 真空压缩机的“ON/OFF” (开关) 处于“OFF” (关闭) 状态。
2. 将电源线连接至适当的接地故障断路器 (ground fault circuit interrupter, GFCI) 插座。
3. 将真空软管安装在垫子的阀门上 (参见 Vac-Lok™ 垫子手册。)

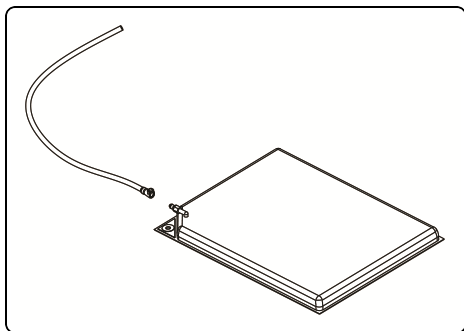

4. 按下 ON/OFF (开启/关闭) 开关, 直至从气垫内抽出大部分空气。
5. 确认真空的 ON/OFF (开启/关闭) 开关处于 OFF (关闭) 位置。
6. 将真空软管从 Vac-Lok™ 垫子上断开。

再处理

1. 如有需要, 使用温和非研磨性清洁剂清洁器械。

维护

注意: 在使用之前, 检查器械是否有损坏迹象和一般性磨损。

处理

⚠ 警告

- 器械应使用适合电子设备的方式进行处理。

产品名称: 人体定位袋

备案凭证编码: 国械备20161113号

产品技术要求编码: 国械备20161113号

备案人名称: MEDTEC, LLC

美泰柯有限公司

备案人注册地址: 1401 8TH ST. S.E. Orange City, IA USA 51041

生产地址: 1401 8TH ST. S.E. Orange City, IA USA 51041

电话: 319 2486757

代理人: 广州康理医疗器械有限公司

代理人注册地址: 广州市天河区华夏路30号2701室

电话: 020-38080269

传真: 020-38080299

售后服务机构名称: 广州康理医疗器械有限公司

地址: 广州市天河区体育东路108号东座602单元

电话: 020-38080269

型号规格: 见标签

结构及组成: 见标签

生产日期: 见标签

失效日期: 见标签

预期用途: 用于放疗患者的体位固定。

说明书编制日期: 2013/6/5

说明书修订日期: 2024/11/21



 **MEDTEC LLC**

1401 8th Street SE
Orange City, IA 51041
United States

800.842.8688, +1 712.737.8688
info@cqmedical.com

COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED. CQ MEDICAL IS A TRADEMARK OF MEDTEC LLC. VAC-LOK IS A TRADEMARK OF MEDTEC LLC. ALL OTHER TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. PRINTED IN USA.

www.CQmedical.com