

Body Pro-Lok™ Cart

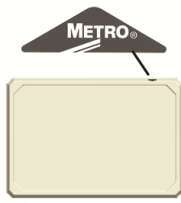
INSTRUCTIONS FOR USE (IFU)

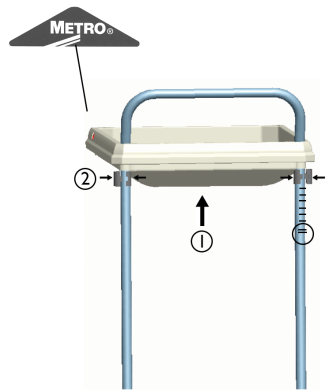


**WARNING**

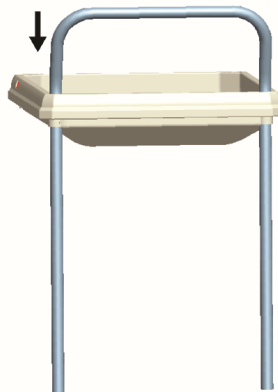
- Do not use if device appears damaged.
- Do not exceed a shelf weight load capacity of 150 lbs (68 kg) and total unit capacity of 400 lbs (182 kg).
- Shelves must be assembled before casters.

LIST OF COMPONENTS:

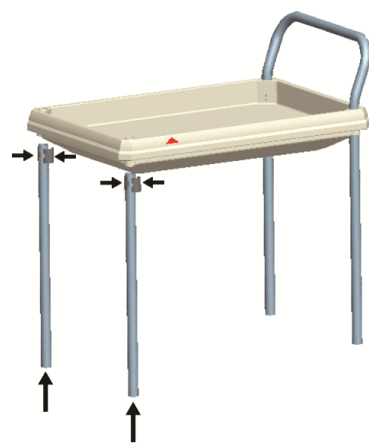
 Body Pro-Lok™ Cart	=	 Top Shelf identified with Metro Logo x1  Middle and bottom shelves x2	 Pole x2	 Handle x1	 Screw x2  Split Sleeve x12  Rail Post x2  Caster x4  Rail x1
---	---	--	--	--	---

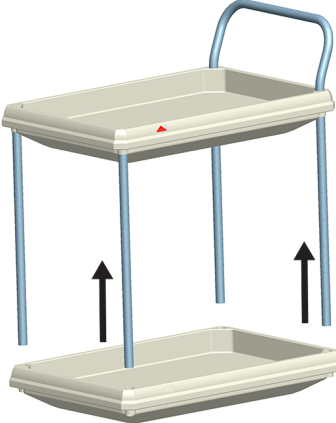


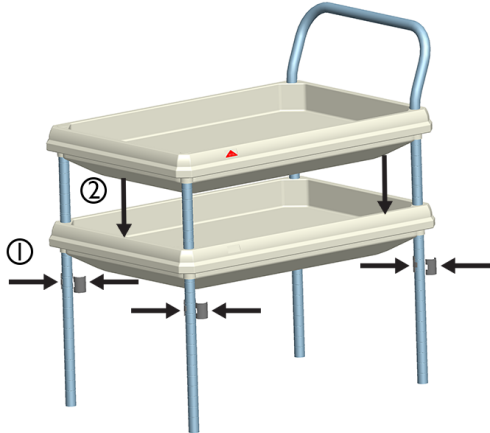
Install split sleeves six grooves up from Site Select™ double groove.

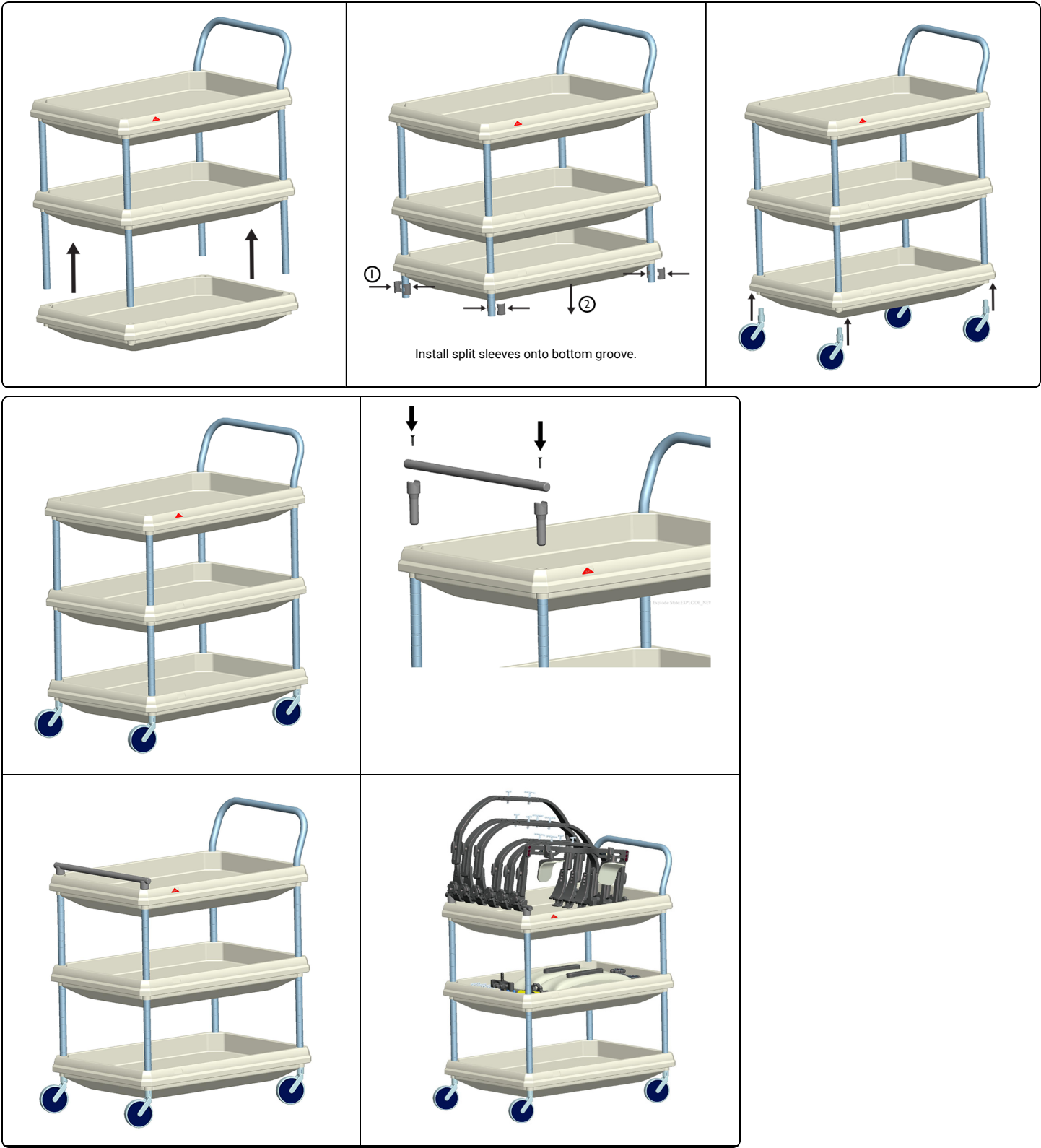


Slide top shelf onto split sleeves. For proper installment there should not be any grooves exposed above top shelf.





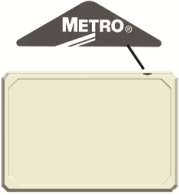


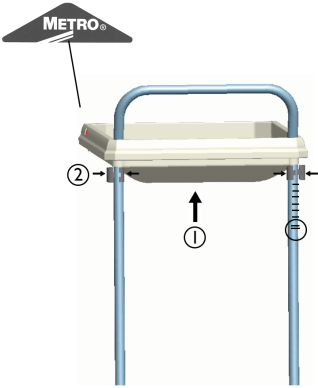
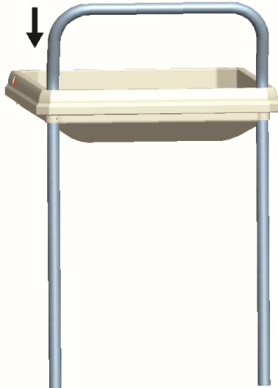


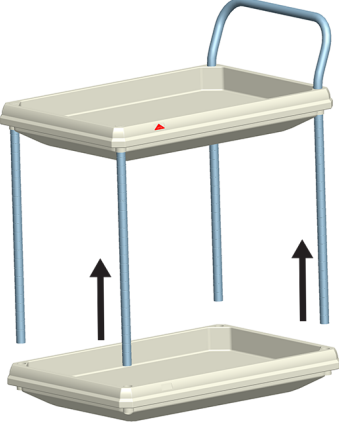
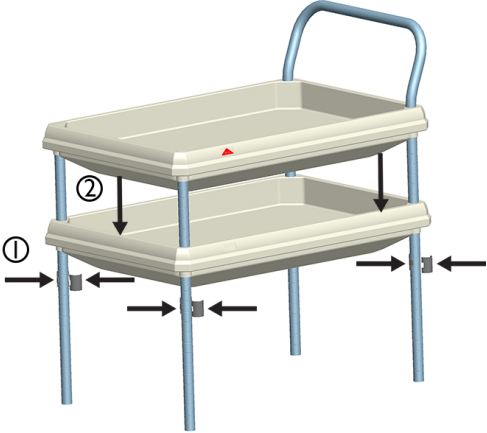
警告

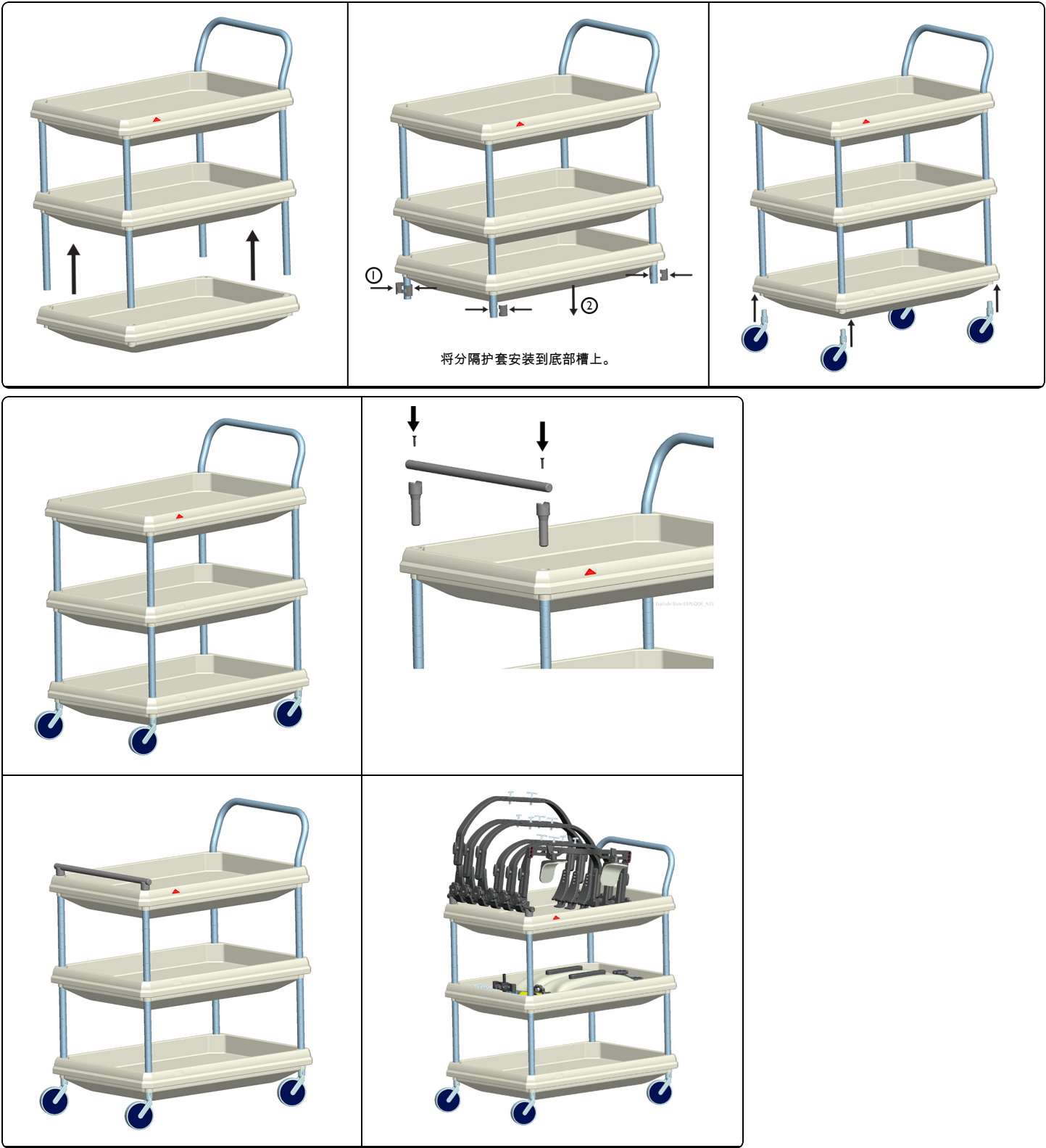
- 如果设备有损坏迹象，请勿使用。
- 切勿超过架板负重能力——150磅 (68 kg) 以及总单位负重能力——400磅 (182 kg) 。
- 必须在安装脚轮之前安装架板。

部件清单：

 Body Pro-Lok™ 推车	 用 Metro® 标识标记的顶部架板 x1  中间和底部架板 x2	 支撑杆 x2	 手柄 x1	 螺钉 x2  分隔护套 x12  轨道柱 x2  脚轮 x4  轨道 x1
---	--	---	--	--

 ② ①	自 Site Select™ 双槽起在六个槽上安装分隔护套。		将顶部架板滑动到分隔护套上。为保证正确安装，在顶部架板上方不得有任何暴露的槽。
--	--------------------------------	--	---

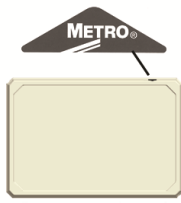
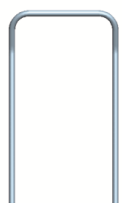
		
---	---	---

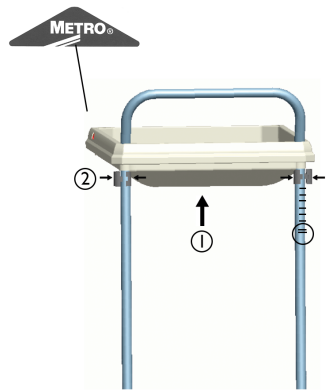
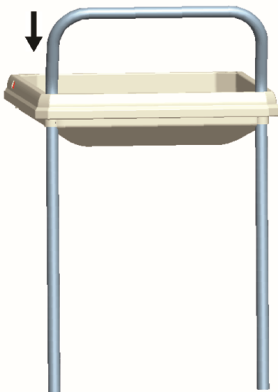


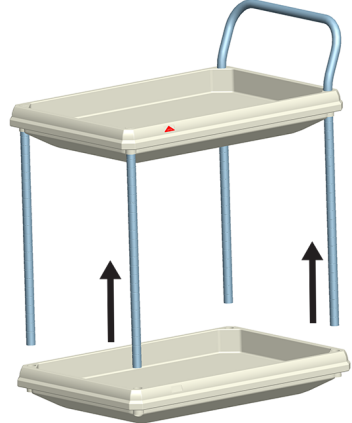
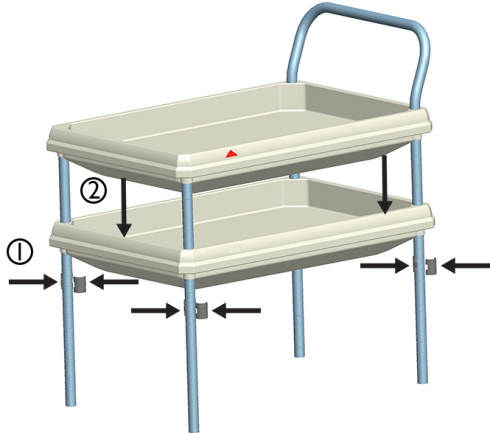
⚠ UPOZORENJE

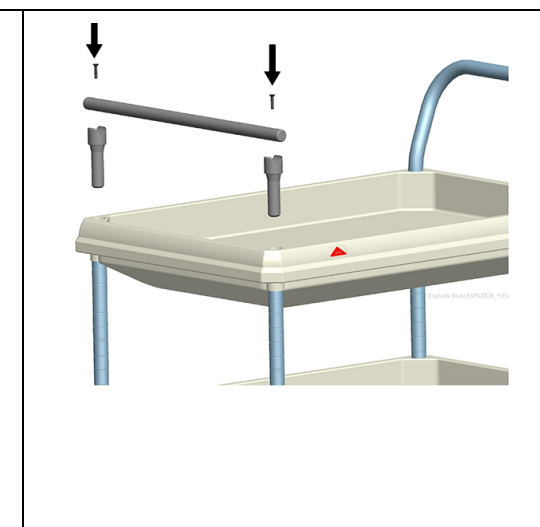
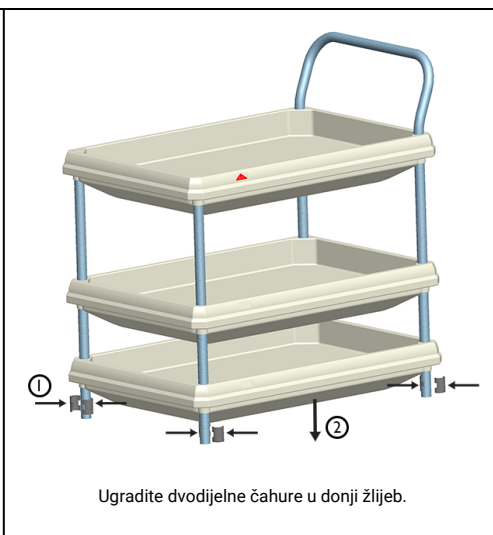
- Ne koristite ako uređaj izgleda oštećeno.
- Maksimalna nosivost police je 68 kg (150 lb), a ukupna nosivost jedinice iznosi 182 kg (400 lbs).
- Police se moraju sastaviti prije kotača.

POPIS SASTAVNIH DIJELOVA:

 Kolica za opremu Body Pro-Lok™	 Gornja polica označena je logotipom Metro x1  Srednje i donje police x2	 Pol x2	 Drška x1	 Vijak x2  Dvodijelna čahura x12  Stupić za ogradu x2  Kotač x4  Vodilica x1
---	--	---	---	--

	Ugradite dvodijelne čahure šest žljebova iznad dvostrukog žljeba Site Select™.		Gurnite gornju policu na dvodijelnu čahuru. Za pravilnu ugradnju iznad gornje police ne smije biti izloženih žljebova.
--	---	---	---

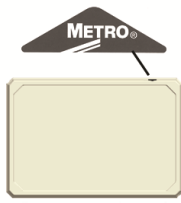
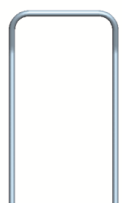
		
---	---	---

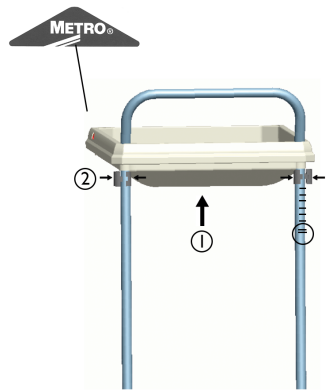


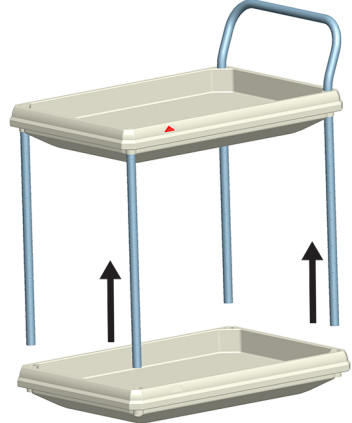
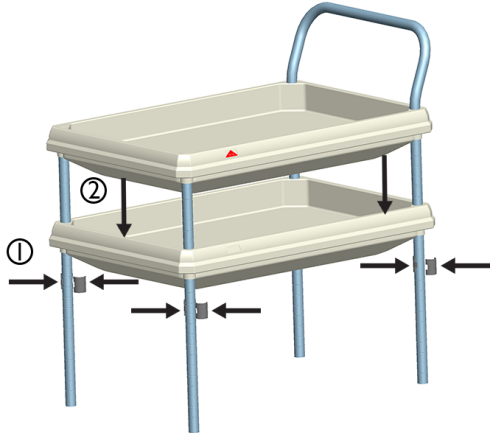
VAROVÁNÍ

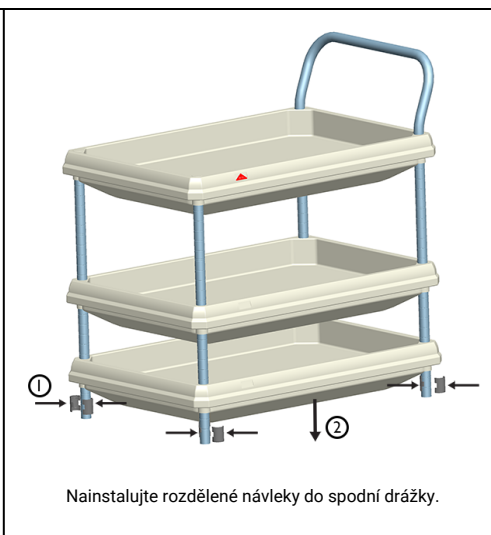
- Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej.
- Nepřekračujte nosnost police 150 lbs (68 kg) a celkovou nosnost jednotky 400 lbs (182 kg).
- Police je nutné sestavit před odlévání.

SEZNAM SOUČÁSTÍ:

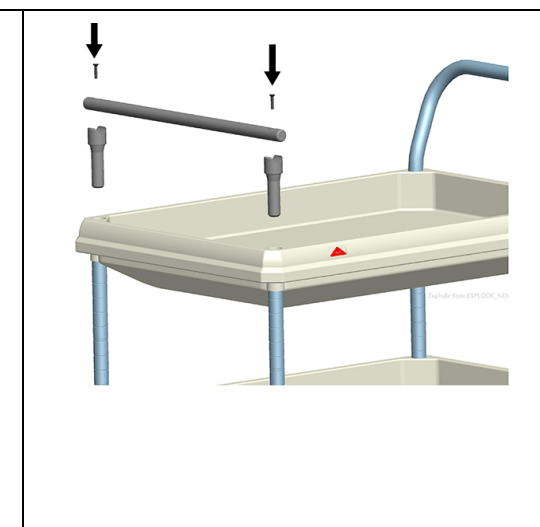
 Vozík Body Pro-Lok™	 Horní police označená logem Metro x1  Střední a spodní police x2	 Stojan x2	 Rukojeť x1	 Šroub x2  Rozdělený návlek x12  Sloupek kolejniče x2  Licí stroj x4  Kolejnice x1
--	---	--	---	--

	Nainstalujte rozdělené návleky šest drážek nad dvojitou drážku Site Select™.		Zasuňte horní polici do rozdělených návleků. Při správné instalaci by nad horní polici neměly být žádné drážky exponované.
--	---	---	---

		
---	---	---



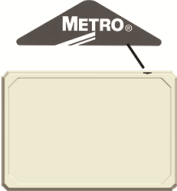
Nainstalujte rozdělené návleky do spodní drážky.

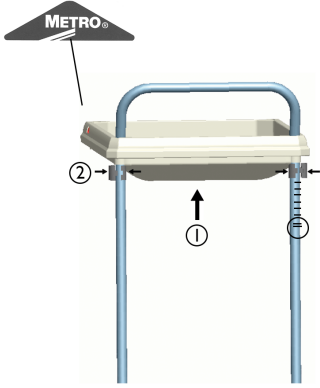
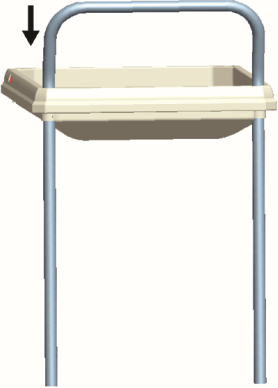


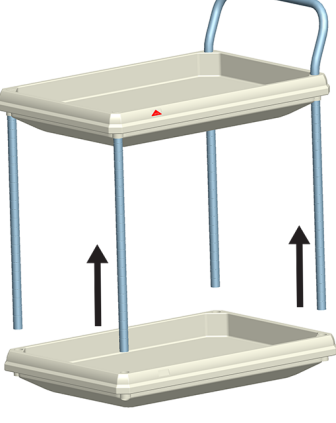
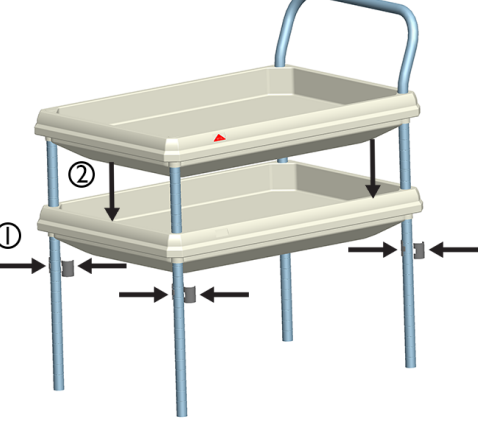
⚠ ADVARSEL

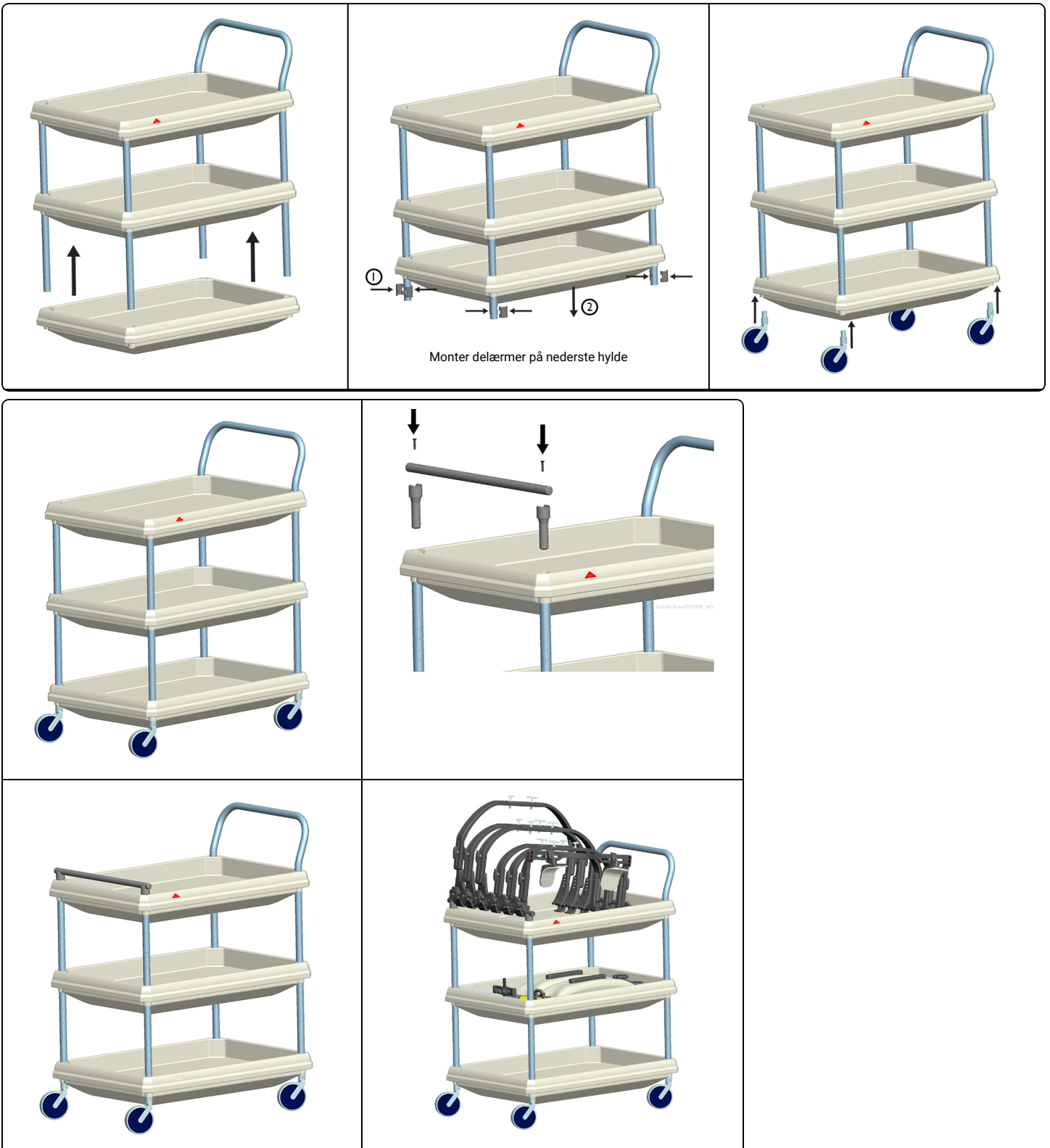
- Må ikke benyttes, hvis enheden synes beskadiget.
- Overskrid ikke en hyldes vægtpacitet på 68 kg (150 lbs) eller enhedens totale vægtpacitet på 182 kg (400 lbs).
- Hylde skal monteres før hjulene.

LISTE OVER KOMPONENTER:

 Body Pro-Lok™ Cart	 Øverste hylde er markeret med et Metro® logo x1  Mellem og nederste hylde x2	 Stativ x2	 Håndtag x1	 Skrue x2  Delt ærme x12  Skinnestolpe x2  Hjul x4  Skinne x1
---	---	--	---	---

	Påsæt delærmerne seks rille over Site Select™ dobbelt rille.		Skub øverste hylde ind på delærmet. For korrekt installering bør der ikke være flere riller synlige over den øverste hylde.
--	---	---	--

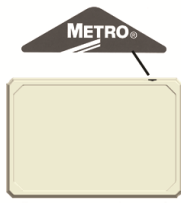
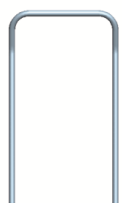
		
---	---	---

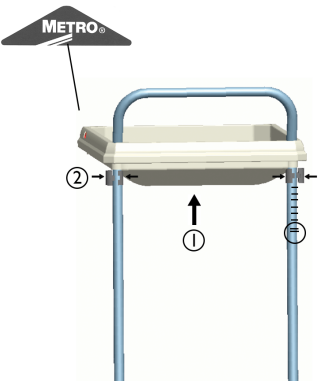


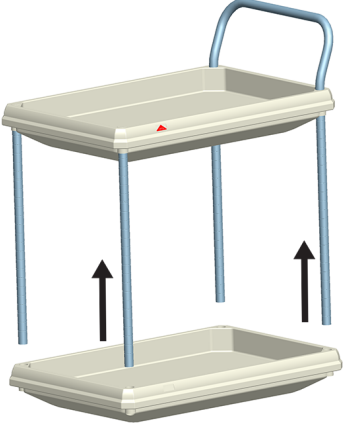
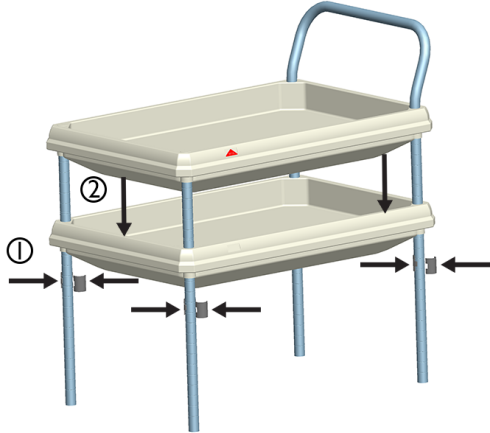
⚠ WAARSCHUWING

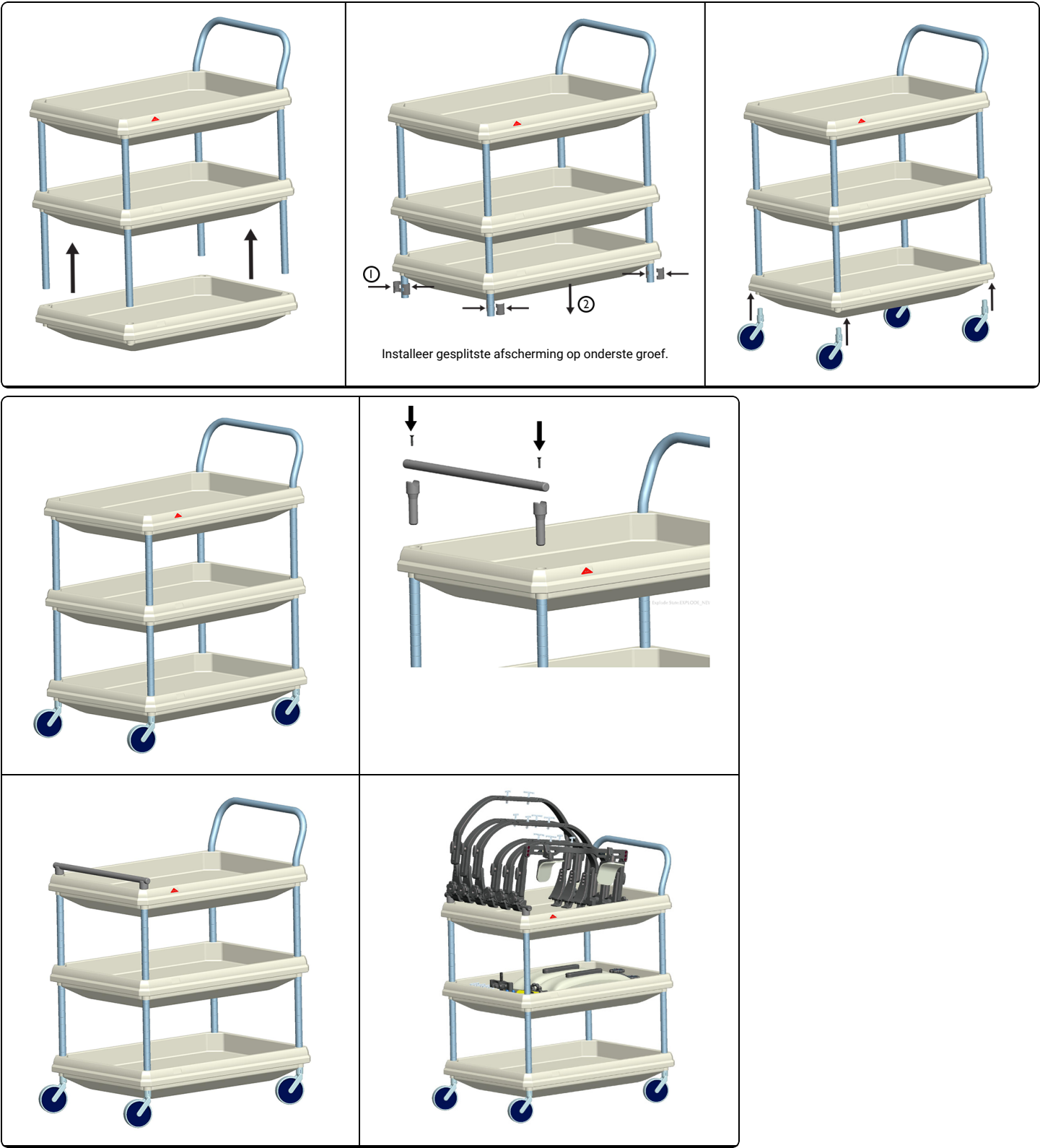
- Niet gebruiken indien apparaat beschadigd lijkt te zijn.
- Een totale plankbelasting van 68 kg (150 lbs) en een totale unitbelasting van 182 kg (400 lbs) mogen niet overschreden worden.
- Planken dienen gemonteerd te worden voor zwenkwielen.

LIJST VAN ONDERDELEN:

 Body Pro-Lok™-wagen	 Bovenste plank wordt herkend aan het Metro®-logo x1  Middelste en onderste plank x2	 Paal x2	 Handgreep x1	 Schroef x2  Gesplitste afscherming x12  Railgreep x2  Zwenkwiel x4  Rail x1
--	--	--	---	--

	Installeer gesplitste afschermingen zes groeven boven de Site Select™ dubbele groef.		Schuif de bovenste plank op de gesplitste afscherming. Voor een juiste installatie mogen er geen groeven boven deze plank zichtbaar zijn.
--	---	---	--

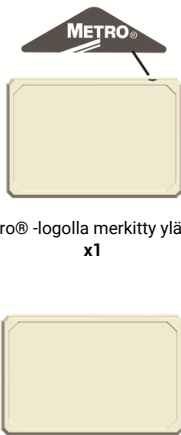
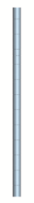
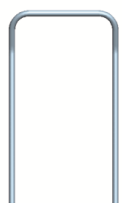
		
---	---	---

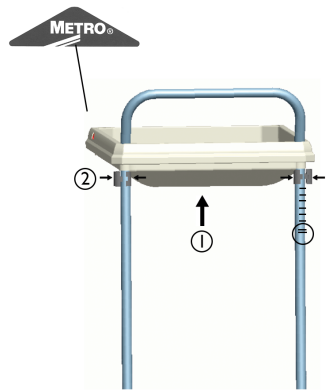


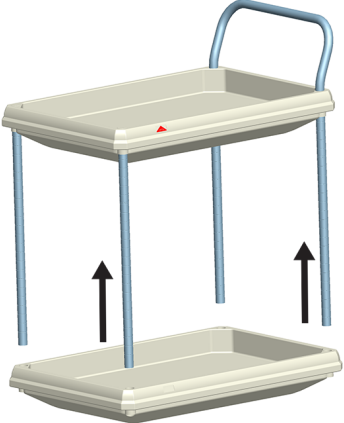
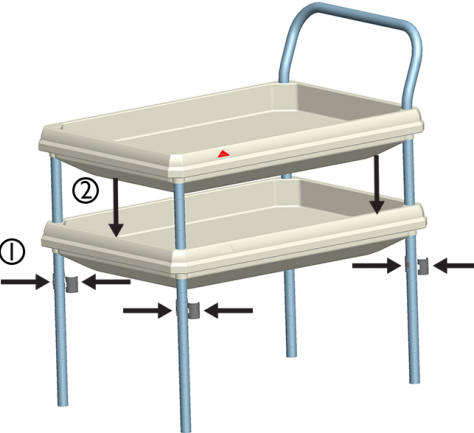
VAROITUS

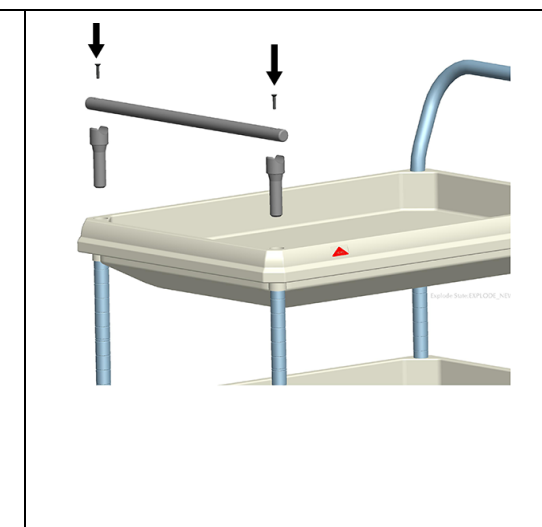
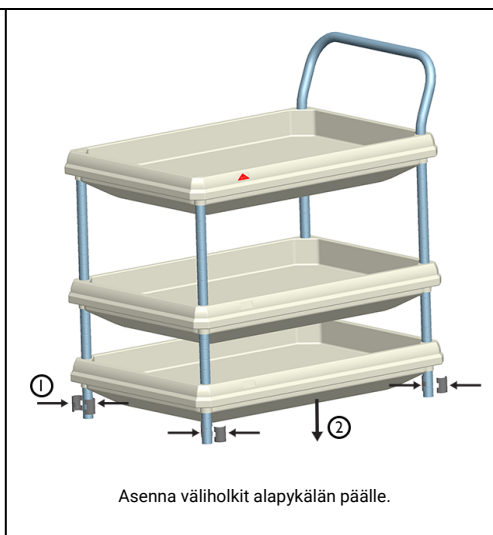
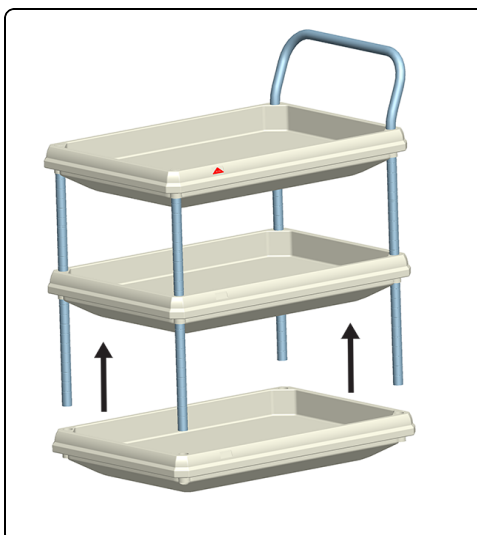
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Hyllyn kuormituksen enimmäispainorajaa 68 kg, ja kärryn kuormituksen kokonaispainorajaa 182 kg ei saa ylittää.
- Hyllyt on koottava ennen pyörien asentamista.

KOMPONENTIT:

 Body Pro-Lok™ -kärry	 Metro® -logolla merkitty ylähylly x1 Keski- ja alahyllyt x2	 Tanko x2	 Kahva x1	 Ruuvi x2 Väliholkki x12 Kiskomerkki x2 Pyörä x4 Kisko x1
---	---	---	---	---

	Asenna väliholkit kuusi pykälää Site Select™ kaksoispykälän yläpuolelle.		Liu'uta ylähylly väliholkkien päälle. Hylly on kunnolla asennettu silloin, kun pykäliä ei ole näkyvissä ylähyllyn yläpuolella.
--	---	---	---

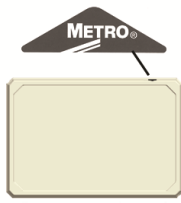
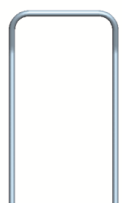
		
---	---	---

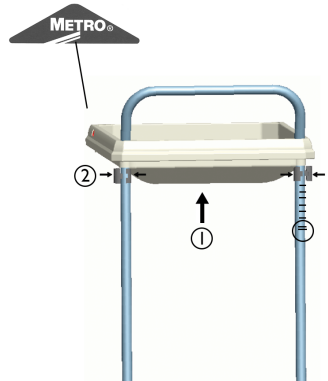
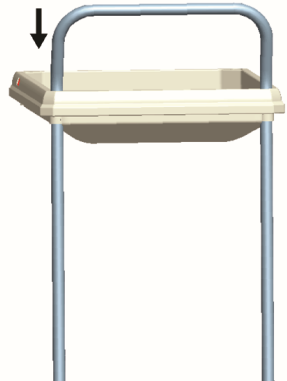


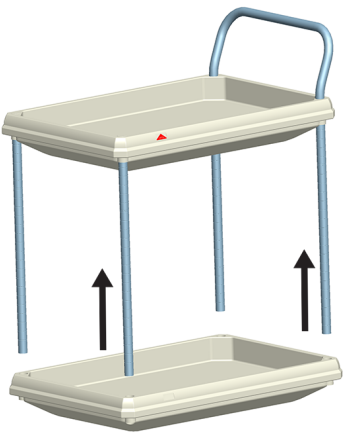
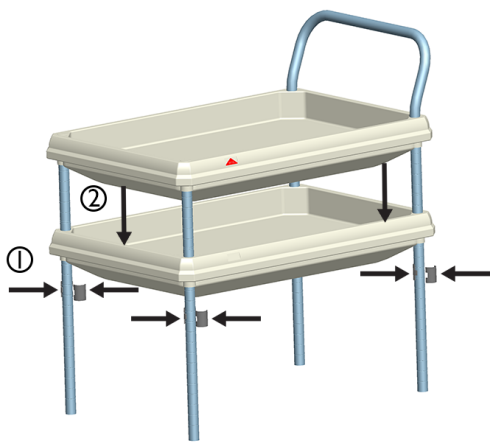
⚠ AVERTISSEMENT

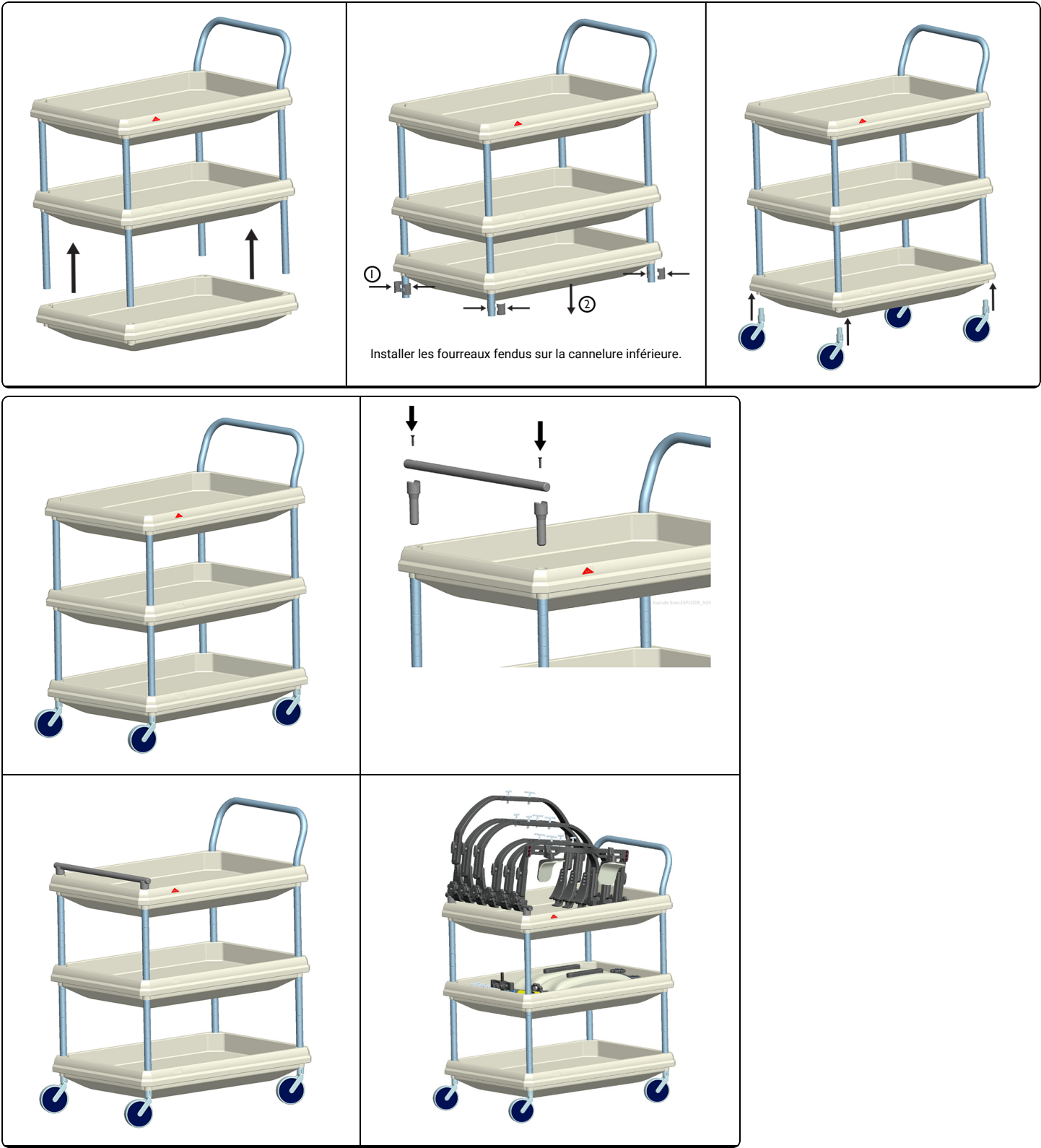
- Ne pas utiliser si le dispositif semble endommagé.
- Ne pas dépasser une charge de tablette de 68 kg (150 lbs) et un poids total de l'appareil de 182 kg (400 lbs).
- Les tablettes doivent être montées avant les roulettes.

LISTE DES ÉLÉMENTS :

 Chariot Body Pro-Lok™	 Tablette supérieure identifiée avec le logo Metro® x1  Tablettes intermédiaire et inférieure x2	 Barre x2	 Poignée x1	 Vis x2  Fourreau fendu x12  Barreau de rail x2  Roulette x4  Rail x1
--	--	---	---	---

	Installer les fourreaux fendus au niveau des doubles cannelures Site Select™.		Faire glisser la tablette supérieure dans les fourreaux fendus. Pour une installation correcte, ne pas laisser de cannelure au dessus de la tablette supérieure.
--	--	---	---

		
---	---	---

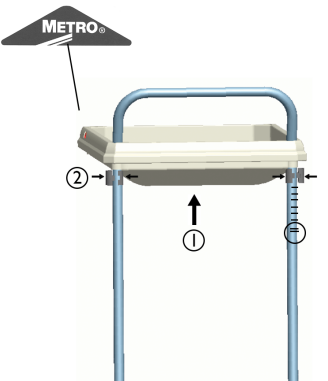
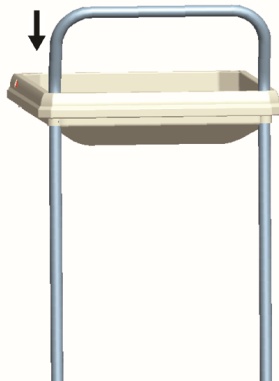


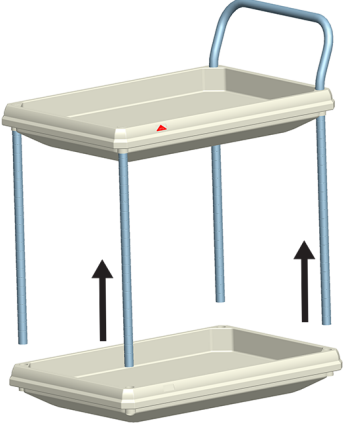
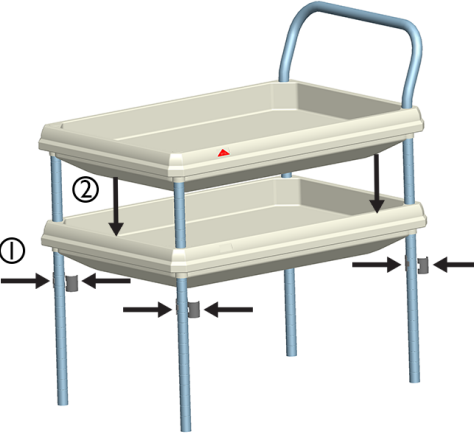
⚠ WARNHINWEIS

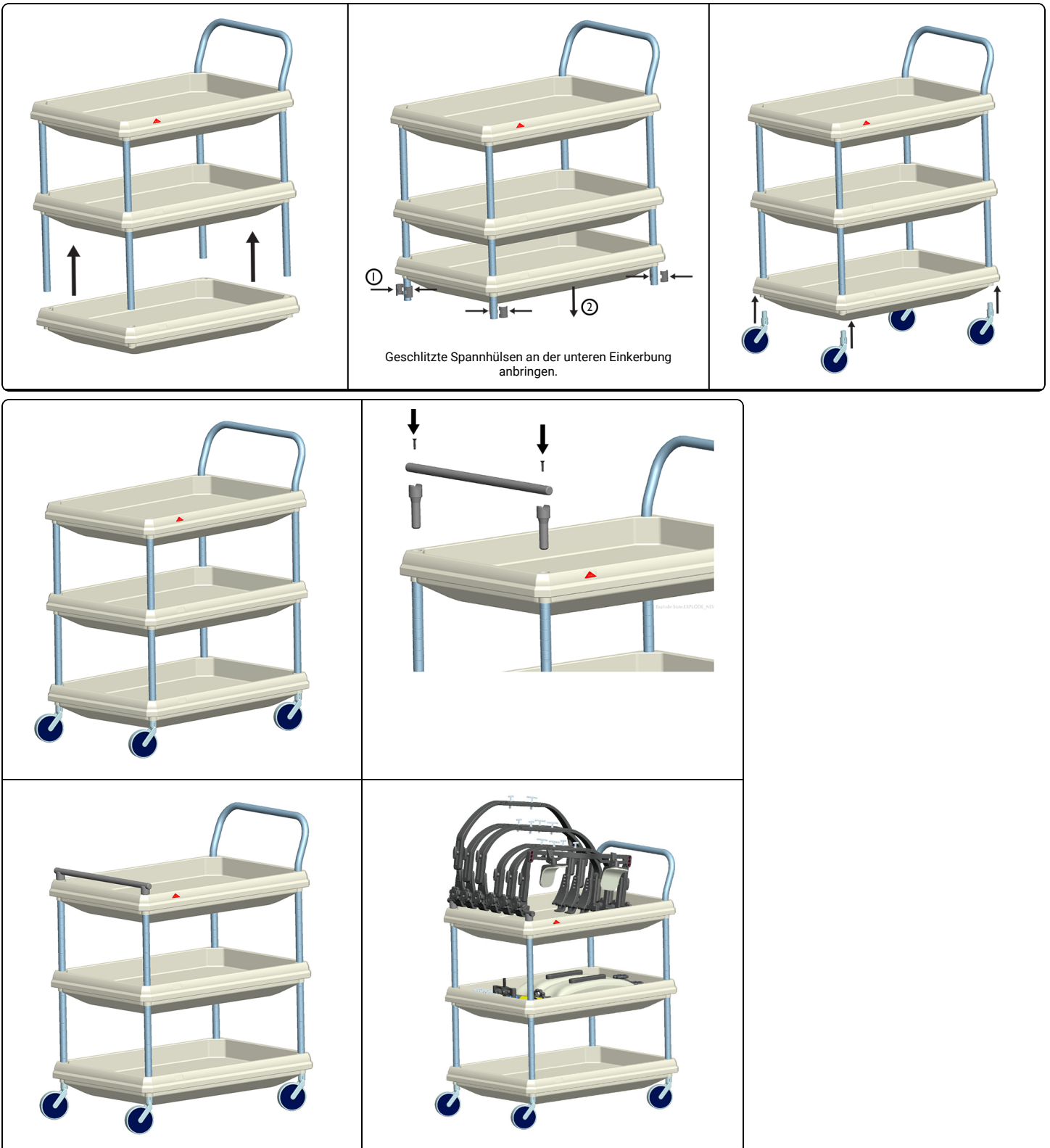
- Das Gerät nicht benutzen, falls es beschädigt wurde.
- Die maximale Ladekapazität eines Fachs von 68 kg sowie die Gesamtkapazität für den Wagen von 182 kg dürfen nicht überschritten werden.
- Die Fächer müssen vor den Fußrollen montiert werden.

KOMPONENTENLISTE:

 Body Pro-Lok™ Cart	 Mit dem Metro®-Logo gekennzeichnetes oberes Fach x1  Mittleres und unteres Fach x2	Stange x2	Griff x1	Schraube x2 geschlitzte Spannhülse x12 Geländerpfosten x2 Fußrolle x4 Rail x1
---	---	----------------------	---------------------	--

	Die geschlitzten Spannhülsen sechs Einkerbungen oberhalb der Site Select™ Doppeleinkerbung anbringen.		Das obere Fach auf die geschlitzten Spannhülsen schieben. Für eine korrekte Montage sollten keine Einkerbungen oberhalb des oberen Fachs frei liegen.
--	--	---	--

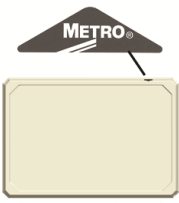
		
---	---	---

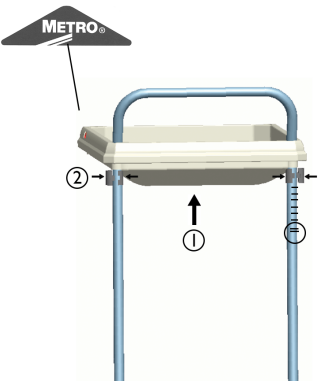


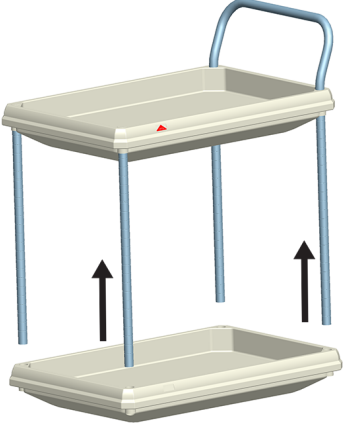
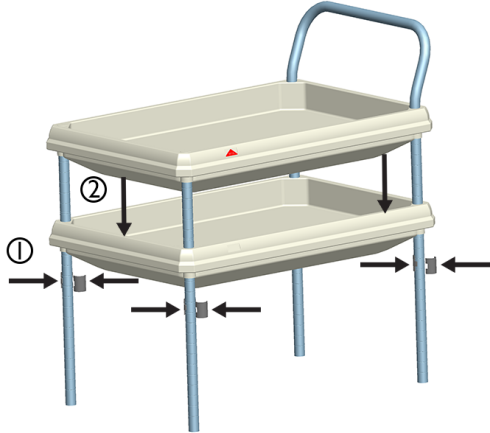
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

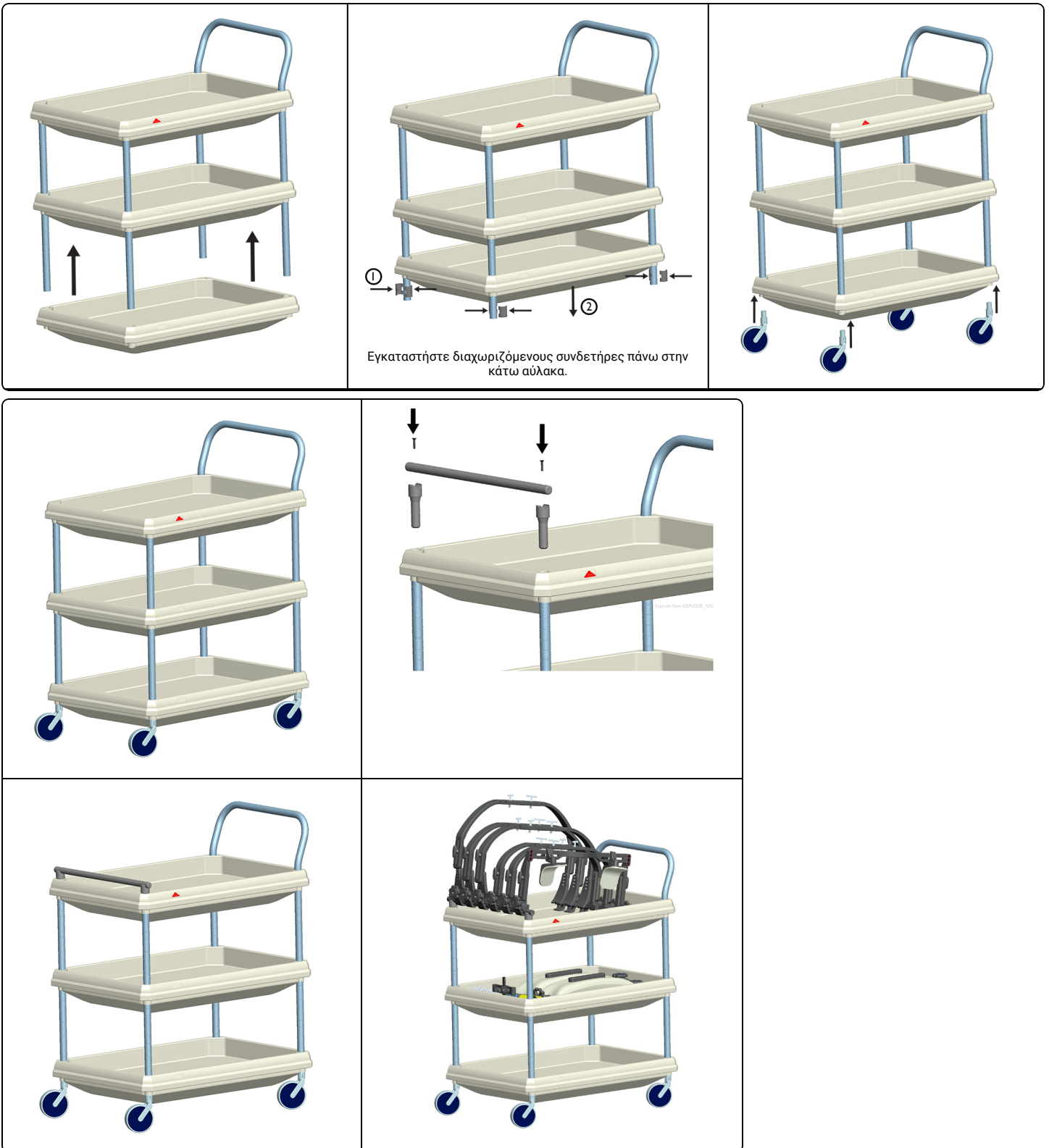
- Να μη χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευή εμφανίζει ζημιές.
- Μην υπερβαίνετε χωρητικότητα φορτίου βάρους ραφίου 68 kg (150 lbs) και συνολική χωρητικότητα μονάδας 182 kg (400 lbs).
- Τα ράφια πρέπει να συναρμολογούνται πριν από τους τροχούς.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

 Τροχήλατο τραπέζι Body Pro-Lok™	 Πάνω ράφι που αναγνωρίζεται με το λογότυπο Metro® x1  Μεσαίο και κάτω ράφι x2	 Στύλος x2	 Λαβή x1	 Βίδα x2  Διαχωριζόμενος συνδετήρας x12  Καρφίδα ράγας x2  Τροχός x4  Ράγα x1
--	--	--	---	---

	Εγκαταστήστε διαχωριζόμενους συνδετήρες έξι αύλακες πάνω από τη διπλή αύλακα Site Select™.		Σύρετε το πάνω ράφι πάνω στους διαχωριζόμενους συνδετήρες. Για σωστή εγκατάσταση, δεν πρέπει να υπάρχουν αύλακες εκτεθειμένες πάνω από το άνω ράφι.
--	---	---	--

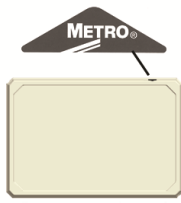
		
---	---	---

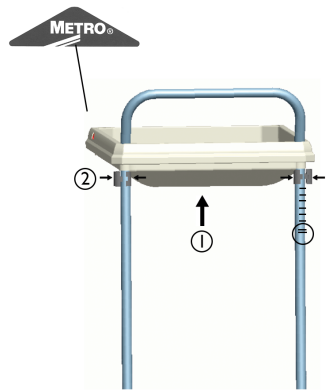


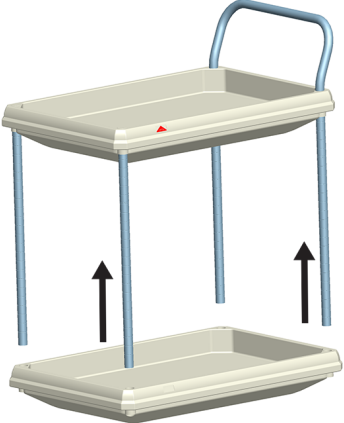
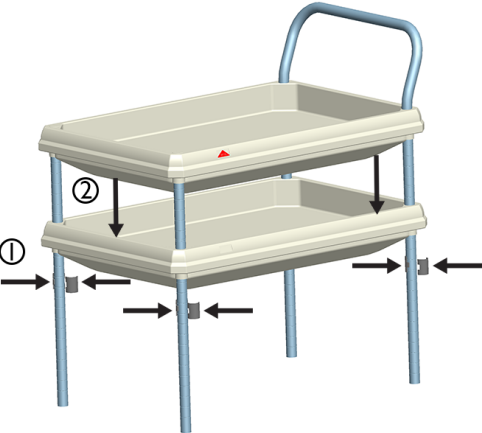
FIGYELEM!

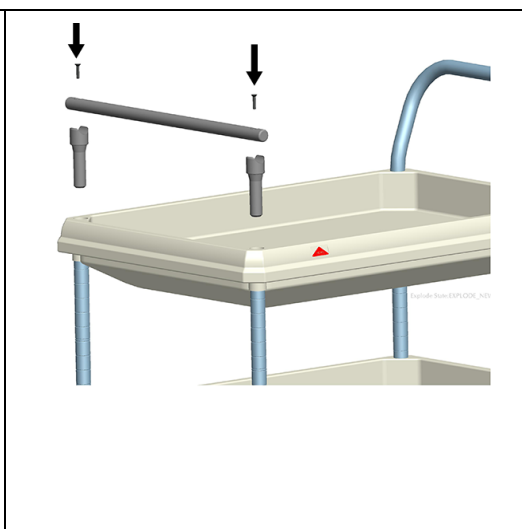
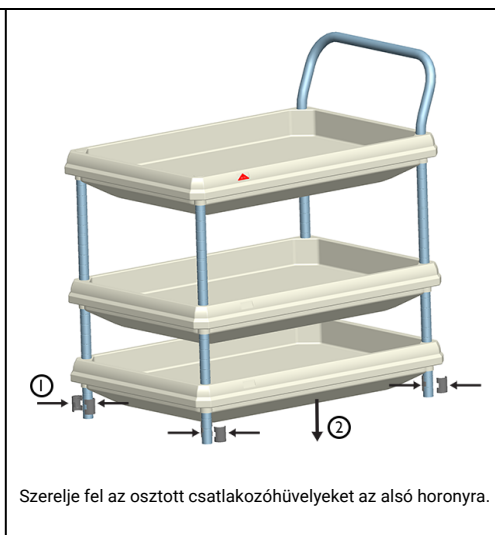
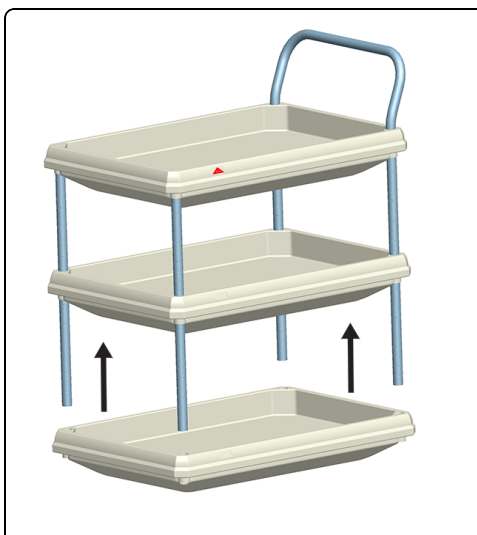
- Ne használja, ha az eszköz sérültnek tűnik.
- A tömeg a 68 kg-os (150 font) polconkénti terhelhetőséget és a 182 kg-os (400 font) teljes terhelhetőséget nem haladhatja meg.
- A polcokat a görgők előtt fel kell szerelni.

RÉSZEGYSÉGEK LISTÁJA:

 Body Pro-Lok™ Kocsi	 A Metro logóval azonosított felső polc x1  Középső és alsó polcok x2	 Pólus x2	 Fogantyú x1	 Csavar x2  Osztott hüvely x12  A korlát oszlopa x2  Görgő x4  Korlát x1
--	---	---	--	--

	Szereljen fel az osztott csatlakozóhüvelyeket a Site Select™ dupla horony feletti hatodik horonyba.		Csúsztassa a felső polcot az osztott csatlakozóhüvelyekre. A megfelelő felszereléshez nem lehetnek szabadon álló hornyok a felső polc felett.
--	--	---	--

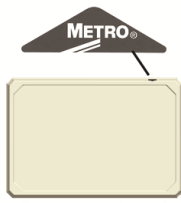
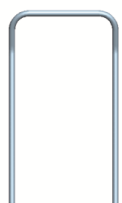
		
---	---	---

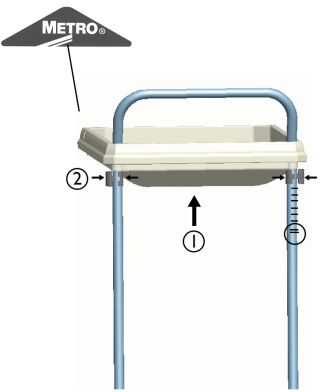


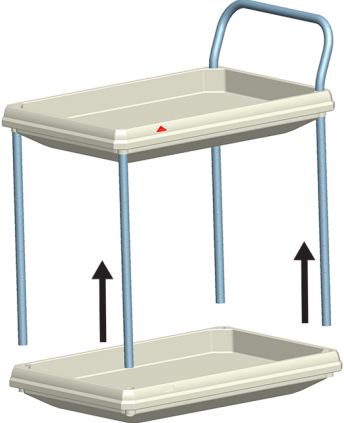
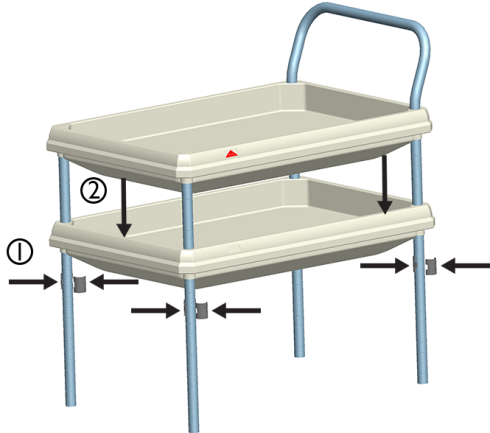
⚠ AVVERTENZA

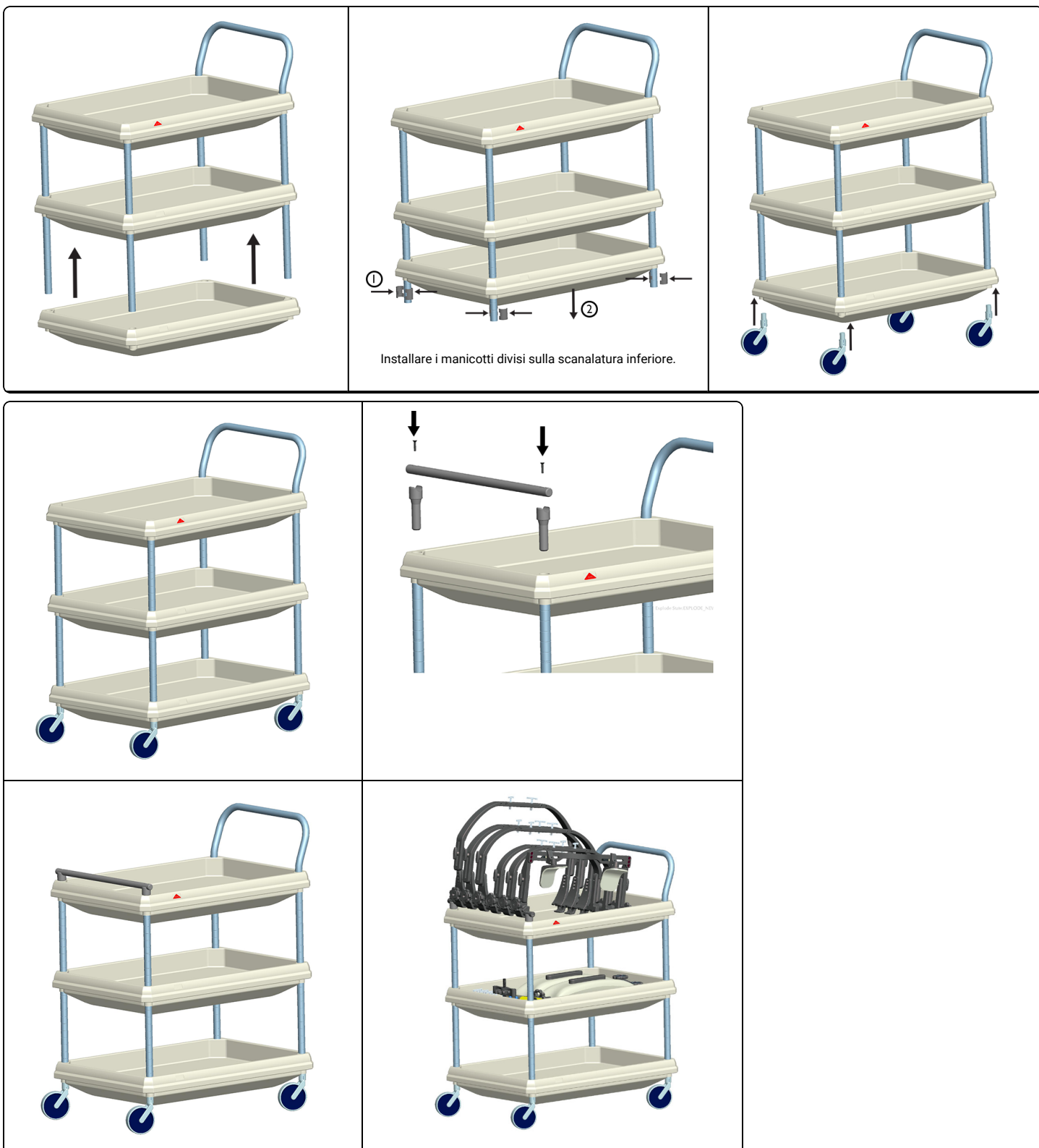
- Non utilizzare il dispositivo se mostra segni di danneggiamento.
- Non superare la capacità di carico del ripiano di 68 kg (150 lb) e la capacità totale dell'unità di 182 kg (400 lb).
- I ripiani devono essere assemblati prima delle ruote orientabili.

ELENCO DEI COMPONENTI:

 Carrello Body Pro-Lok™	 Ripiano superiore contrassegnato dal logo Metro® x1  Ripiani mediano e inferiore x2	 Asta x2	 Impugnatura x1	 Vite x2  Manicotto diviso x12  Perno della guida x2  Ruota orientabile x4  Guida x1
---	--	--	---	--

	Installare i manicotti divisi sei scanalature al di sopra della doppia scanalatura del Site Select™.		Far scorrere il ripiano superiore sui manicotti scanalati. Per un corretto montaggio non ci devono essere scanalature scoperte al di sopra del ripiano superiore.
--	---	---	--

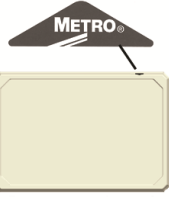
		
---	---	---

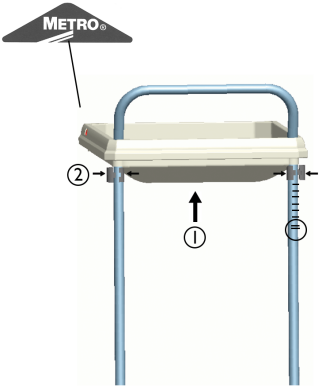
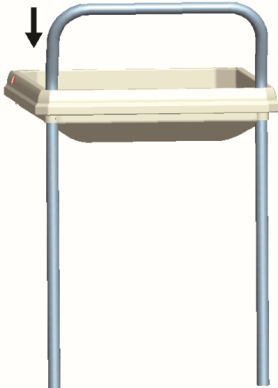


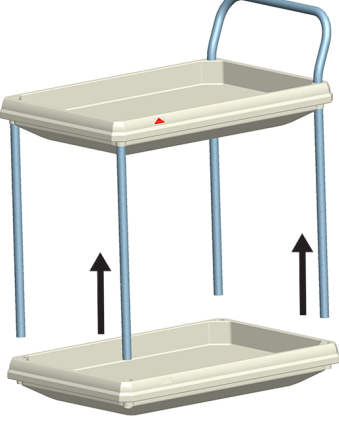
⚠ 警告

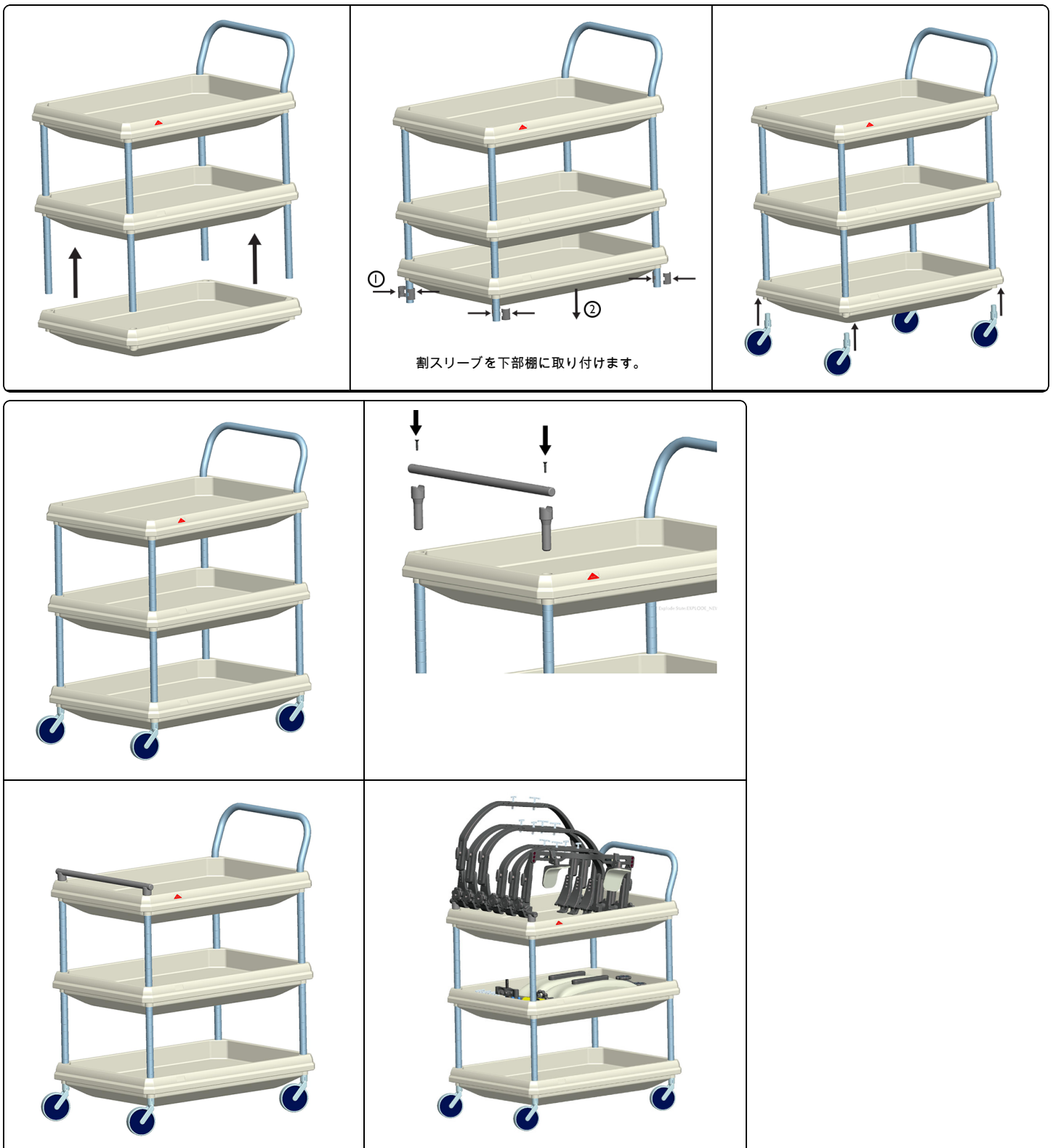
- ・製品に損傷が見られる場合は使用しないでください。
- ・68 kg (150 lbs) の架重量負荷能力と 182 kg (400 lbs) の全ユニット能力を越えないようにします。
- ・棚をキャスターの前にアSEMBルする必要があります。

部品リスト：

 Body Pro-Lok™ カート	 Metro® ロゴで識別する上部棚 x1  中中下部棚 x2	 ポール x2	 ハンドル x1	 シム x2  割スリーブ x12  レールポスト x2  キャスター x4  レール x1
--	---	---	--	--

	Site Select™ 2重溝から割スリーブの6つの溝を取り付けます。		上部棚を割スリーブにスライドさせます。正しく取り付けるには溝が上部棚の上に露出しないことです。
---	---	--	--

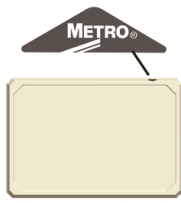
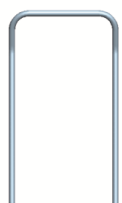
		
---	---	---

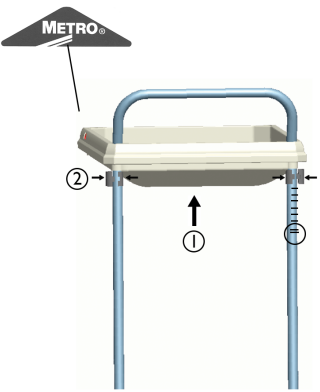
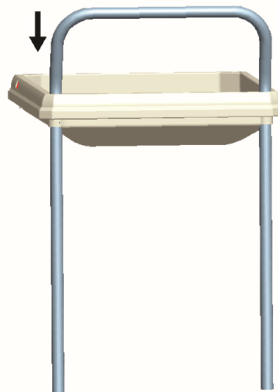


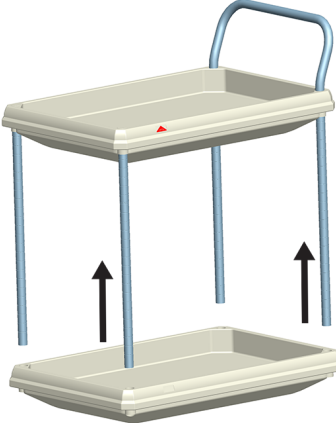
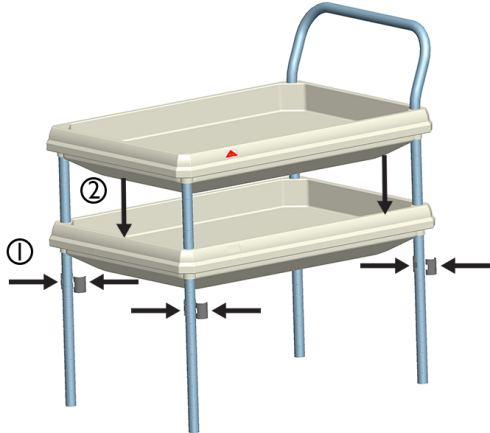
⚠ BRĪDINĀJUMS

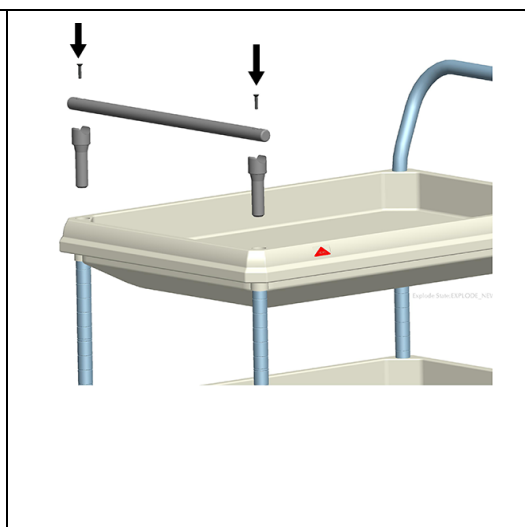
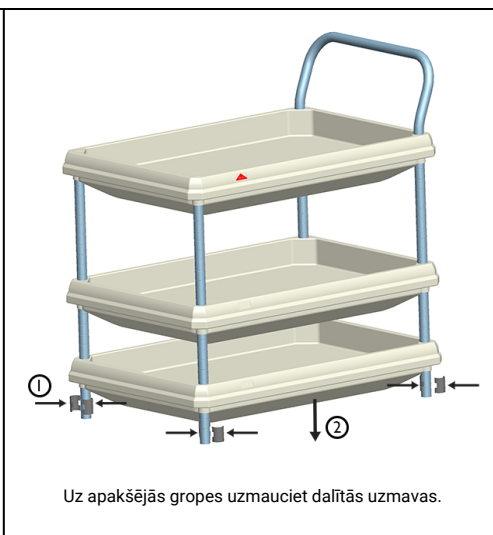
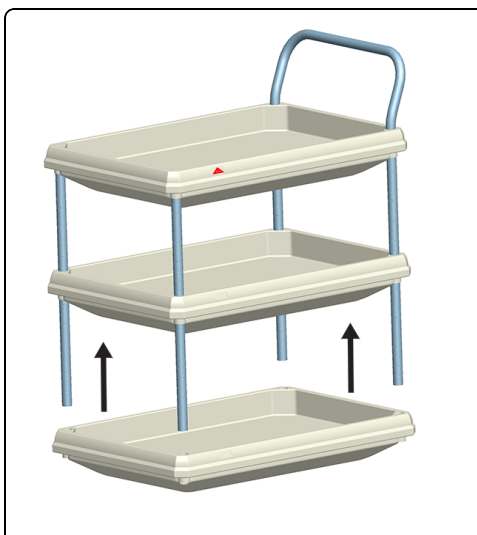
- Neizmantojiet, ja ierīce ir bojāta.
- Nepārsniedziet 68 kg plaukta svara slodzes kapacitāti un 182 kg kopējo vienības kapacitāti.
- Plaukti ir jāsamontē pirms riteņiem.

SASTĀVDAĻU SARAKSTS:

 Body Pro-Lok™ ratiņi	 Augšējais plaukts identificēts ar Metro logotipu x1  Vidējie un apakšas plaukti x2	 Balsts x2	 Rokturis x1	 Skrūve x2  Sadalītā uzmava x12  Margu stabs x2  Skritulis x4  Marga x1
---	---	--	--	---

	Uzmauciet dalītās uzmavas sešas gropes uz augšu, sākot no Site Select™ dubultās gropes.		Uzbīdiet augšējo plauktu uz sadalītām uzmavām. Pareizai uzstādīšanai virs augšējā plaukta nedrīkst būt nevienas brīvas rievas.
--	--	---	---

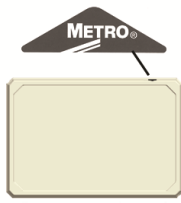
		
---	---	---

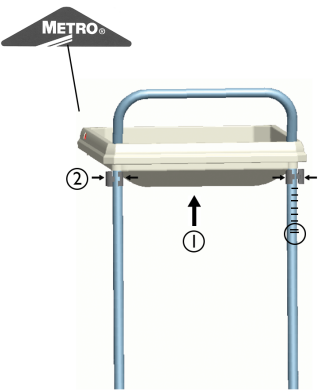
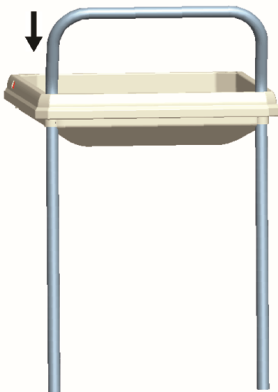


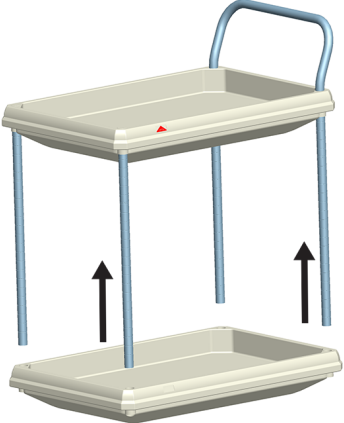
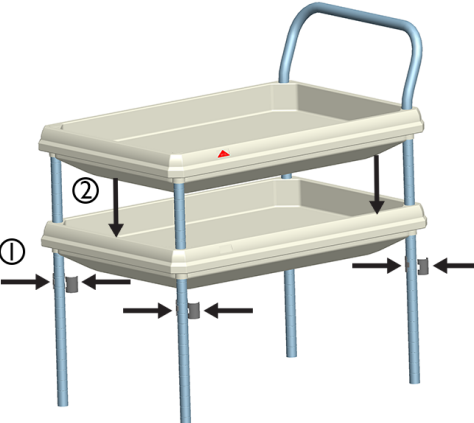
⚠ ADVARSEL

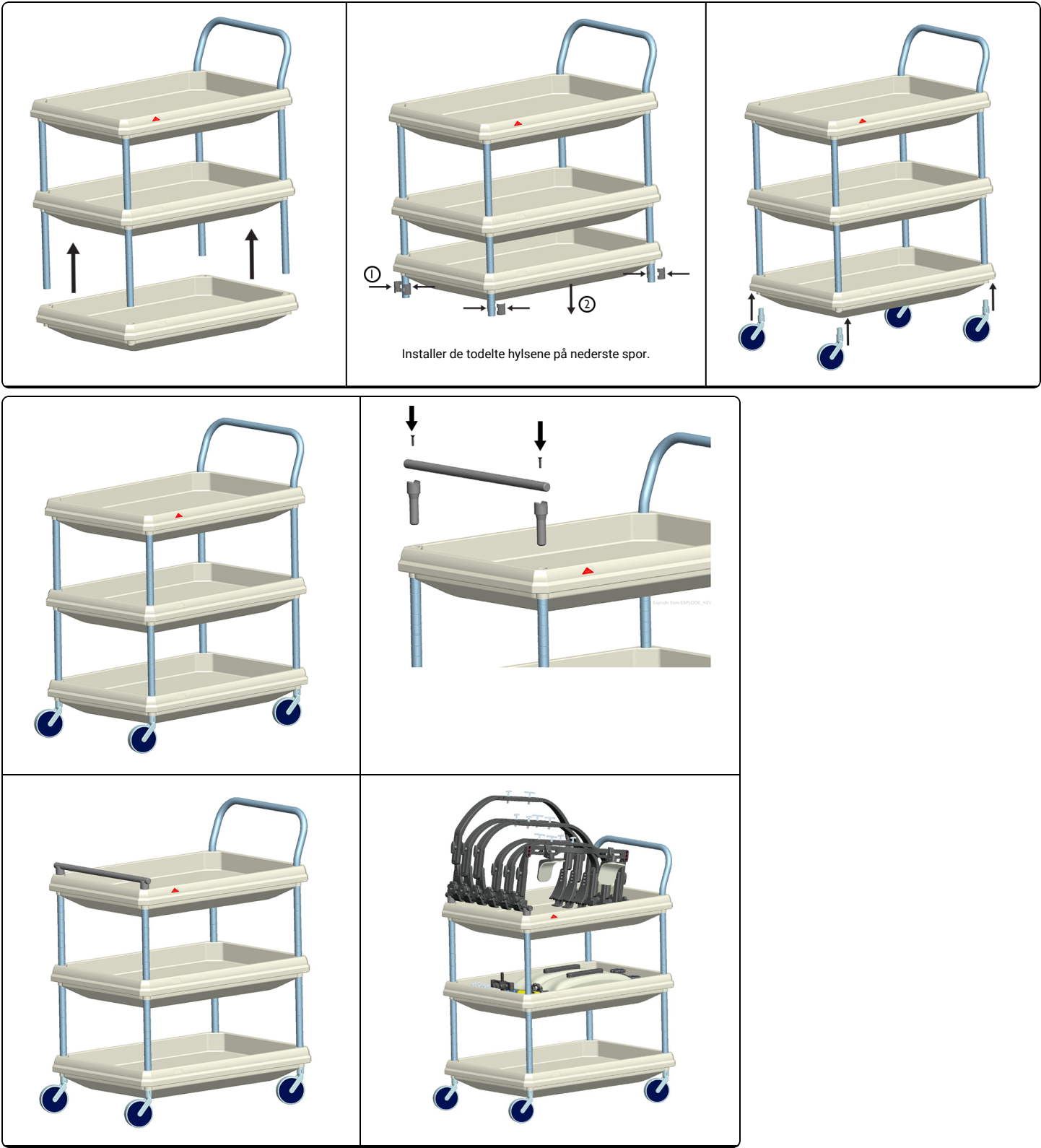
- Apparatet må ikke brukes hvis det ser ut til å være skadet.
- Skal ikke ha en hyllevekt på over 68 kg (150 pund) og total kapasitet for enheten på mer enn 182 kg (400 pund).
- Hyllene må monteres før trinsene.

LISTE OVER KOMPONENTER:

 Body Pro-Lok™-tralle	 Øverste hylle er identifisert med Metro® logoen x1  Midterste og nederste hylle x2	 Stang x2	 Håndtak x1	 Skrue x2  Todelt hylse x12  Skinnestang x2  Trinse x4  Skinne x1
---	---	---	---	---

	Installer de todelte hylsene seks spor opp fra dobbeltsporet for Site Select™.		Skyv den øverste hyllen inn på de todelte hylsene. Om de er riktig installert, skal det ikke være noen synlige spor over den øverste hyllen.
--	---	---	---

		
---	---	---

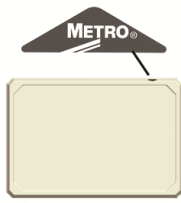
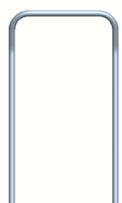


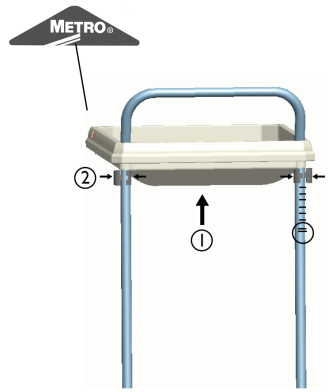
Installer de todelte hylsene på nederste spor.

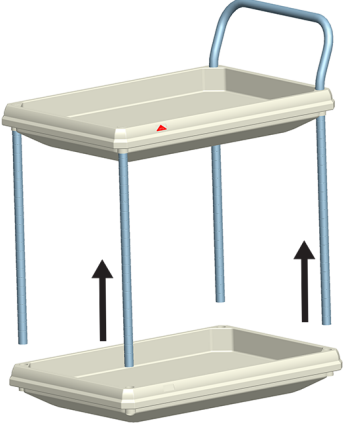
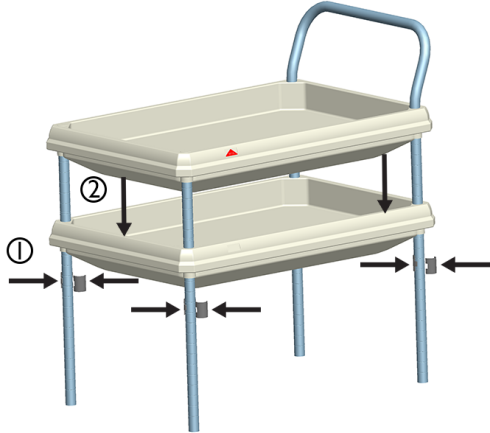
⚠ OSTRZEŻENIE

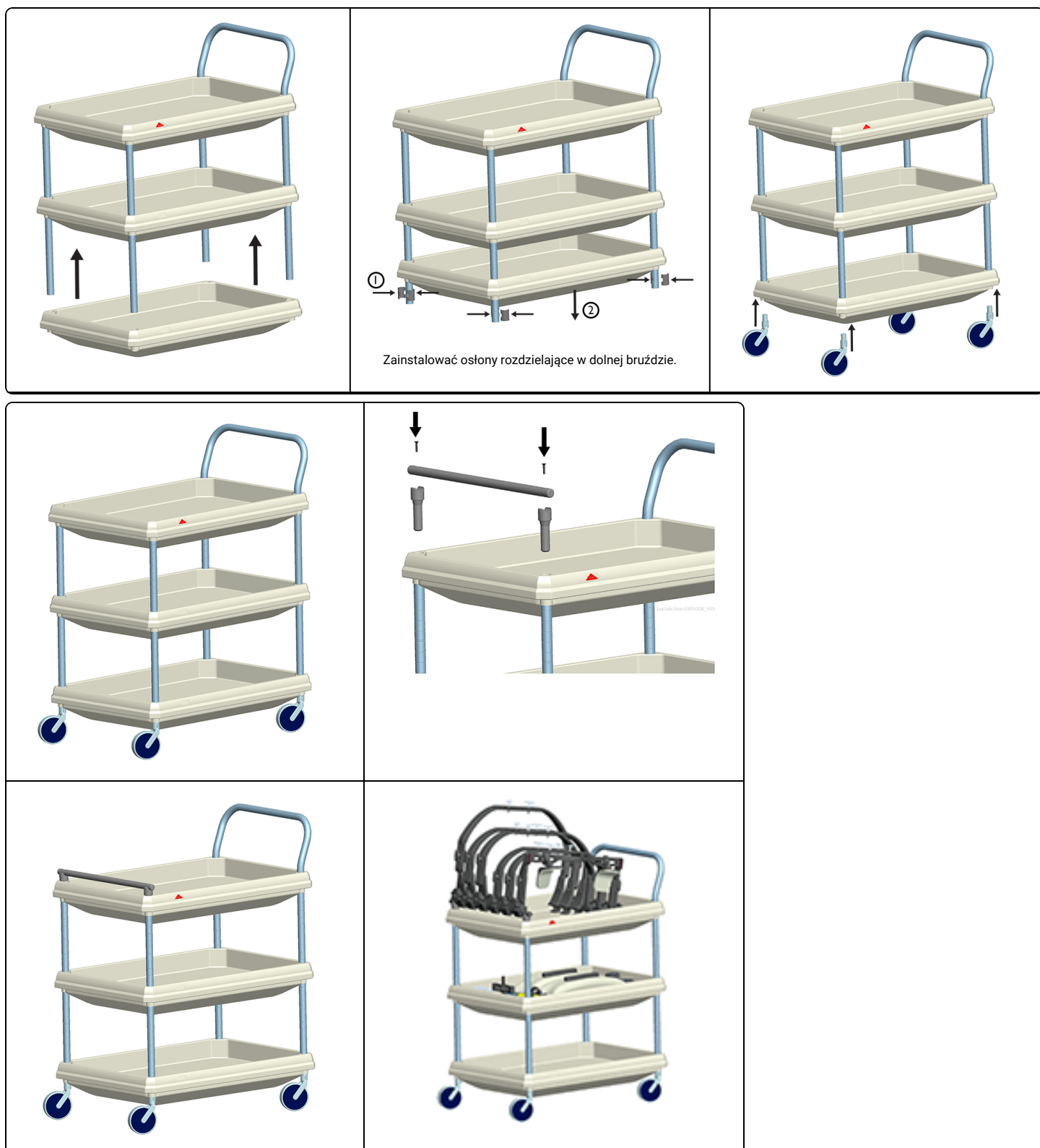
- Nie używać, jeśli wyrób wydaje się być uszkodzony.
- Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia półki 150 lb (68 kg) i całkowitego obciążenia elementu 400 lb (182 kg).
- Półki należy zmontować zanim zmontowane zostaną kółka.

LISTA ELEMENTÓW:

 Body Pro-Lok™ Wózek	 Górna półka oznaczona logo Metro x1  Półka środkowa i dolna x2	 Stojak x2	 Uchwyt x1	 Śruba x2  Osłona rozdzielająca x12  Statyw szyny x2  Kółko x4  Szyna x1
--	---	--	--	--

	Zainstalować osłony rozdzielające sześć bruzd od podwójnej bruzdy Site Select™.		Nasunąć górną półkę na osłony rozdzielające. Aby instalacja była poprawna, nie powinno być żadnych odsłoniętych wgłębień nad górną półką.
--	--	---	--

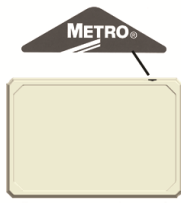
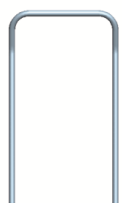
		
---	---	---

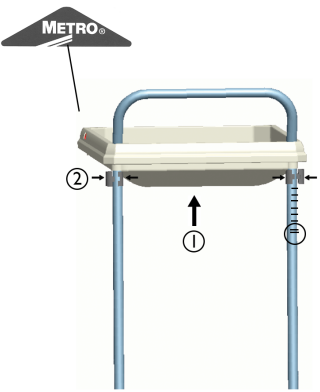
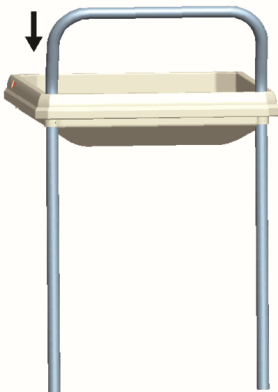


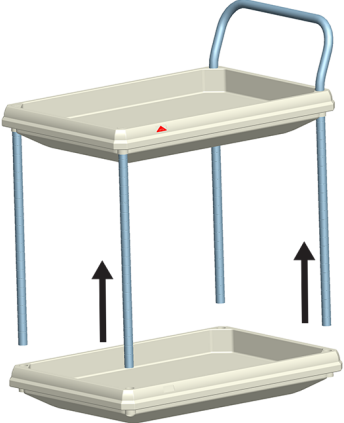
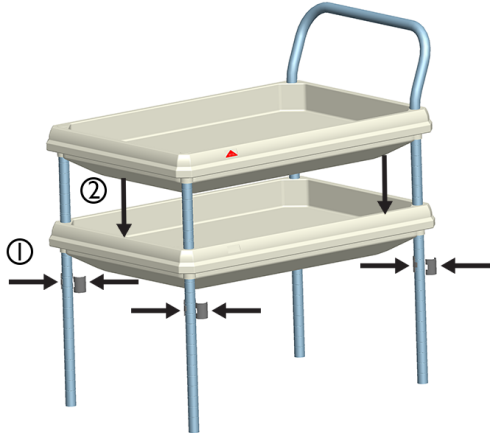
⚠ AVISO

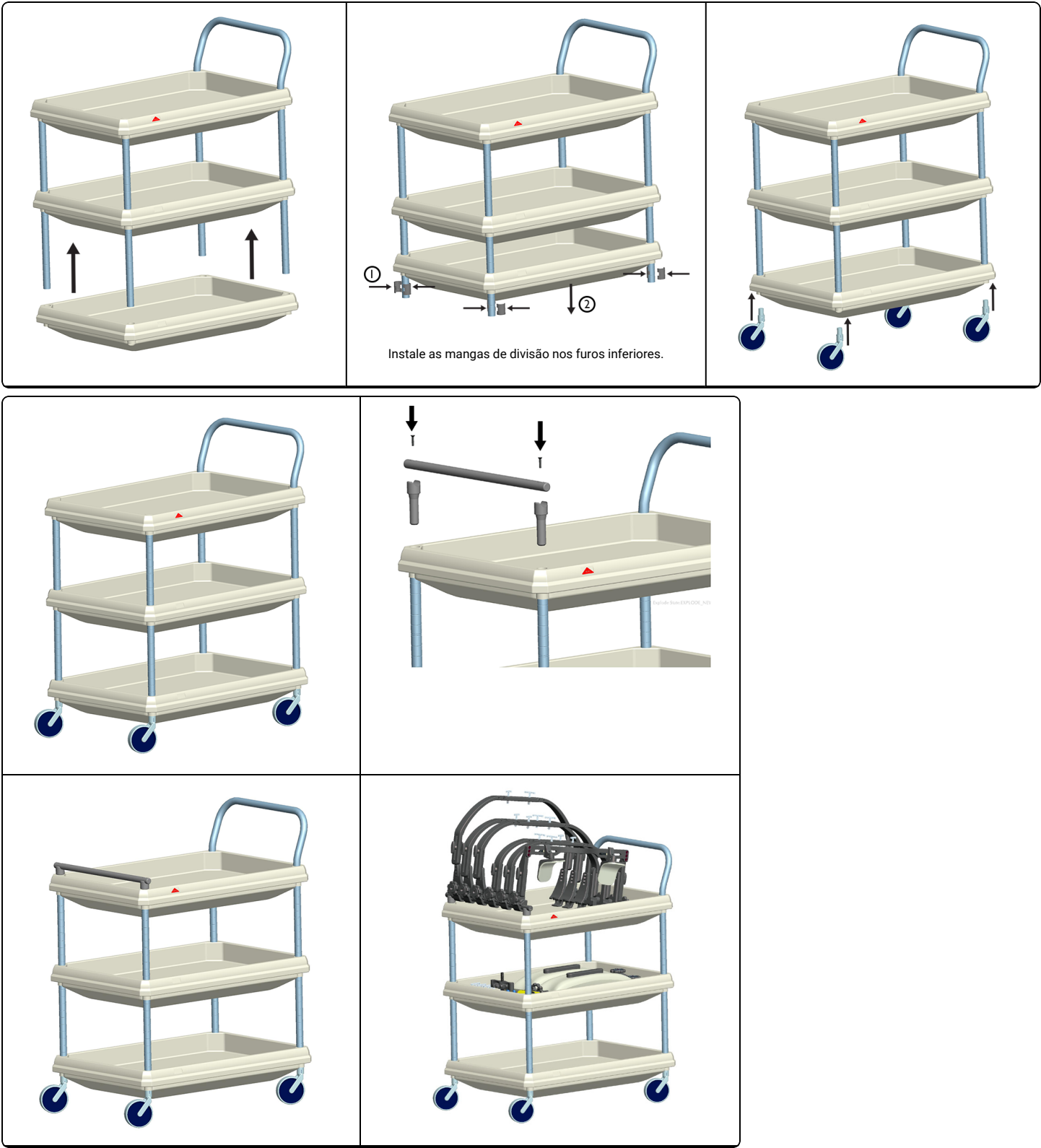
- Não utilizar se o dispositivo aparentar estar danificado.
- Não exceder a capacidade de peso de carga das prateleiras de 68 kg (150 lb) e a capacidade total da unidade de 182 kg (400 lb).
- As prateleiras têm de ser montadas antes das rodas.

LISTA DE COMPONENTES:

 Carrinho de Body Pro-Lok™	 Prateleira superior identificada com logótipo Metro® x1  Prateleiras do meio e inferior x2	 Haste x2	 Pega x1	 Parafuso x2  Manga de divisão x12  Haste da calha x2  Roda x4  Calha x1
--	---	---	--	--

	Instale as mangas de divisão seis furos acima do furo duplo Site Select™.		Coloque a prateleira superior sobre as mangas de divisão. Para uma instalação adequada, não deve haver furos expostos acima da prateleira superior.
--	--	---	--

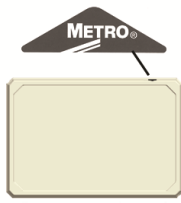
		
---	---	---

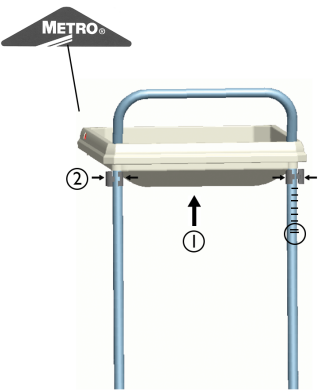


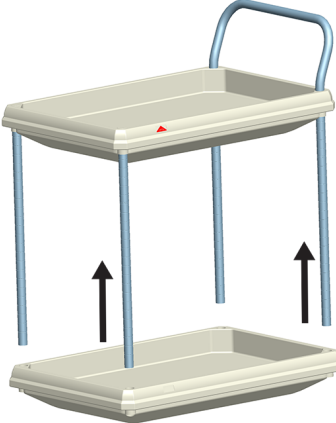
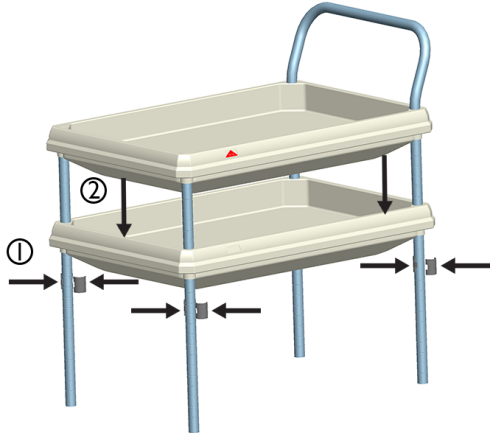
⚠️ AVERTIZARE

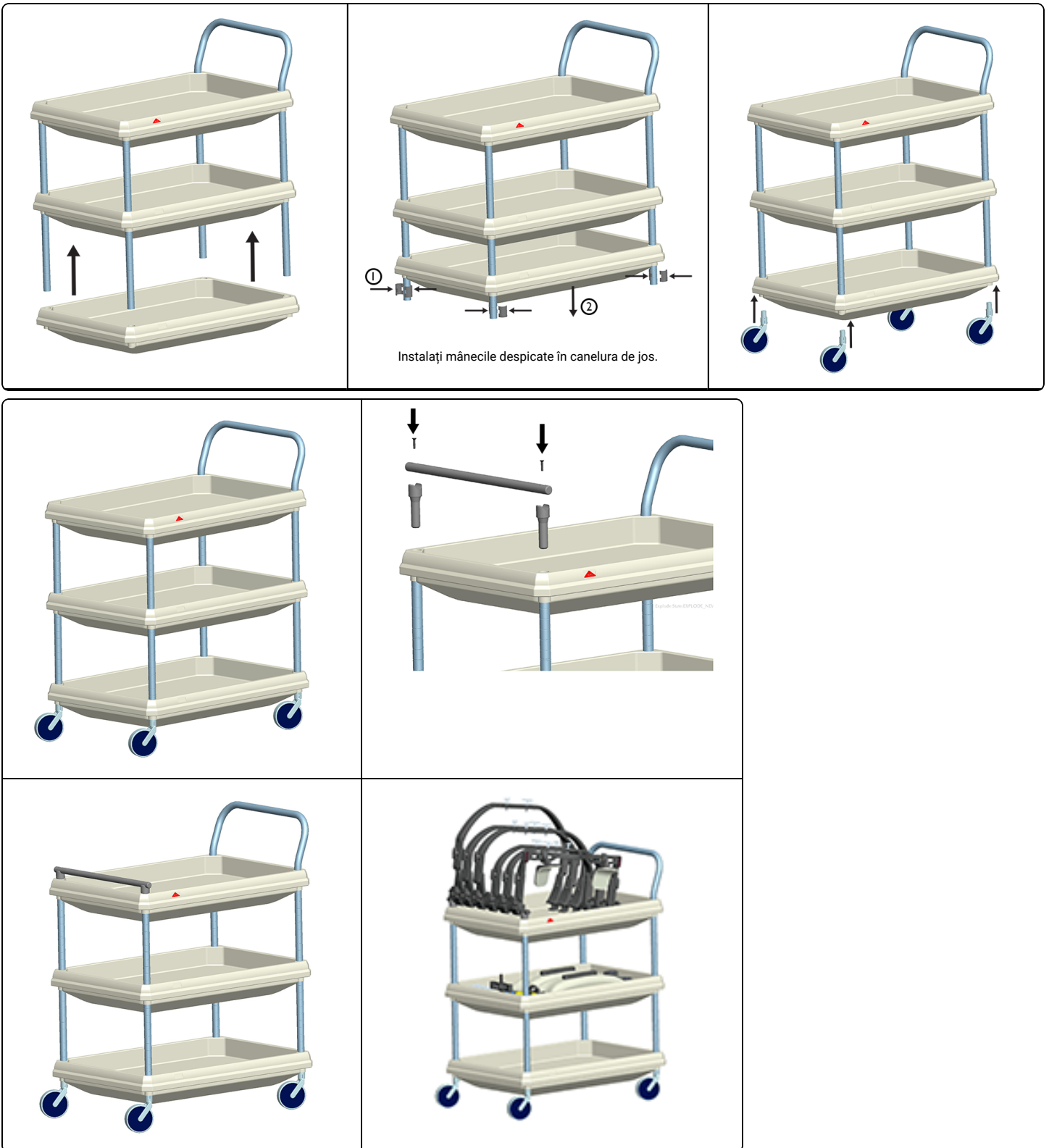
- A nu se utiliza dacă dispozitivul pare deteriorat.
- Nu depășiți o capacitate de încărcare raftului de 68 kg (150 lb) și o capacitate totală a unității de 182 kg (400 lb).
- Rafturile trebuie asamblate înainte de roților.

LISTA COMPONENTELOR:

 Cărucior Body Pro-Lok™	 Raft superior identificat cu sigla Metro x1  Rafturi de mijloc și de jos x2	 Pol x2	 Mâner x1	 Șurub x2  Manșon desfăcut x12  Post șină x2  Rotiță x4  Șină x1
---	--	---	---	--

	Instalați mânele despicate la șase caneluri în sus de la canelura dublă Site Select™.		Glisați raftul superior pe mânele despicate. Pentru o instalare corectă, nu trebuie să existe niciun fel de caneluri expuse deasupra raftului superior.
--	--	---	--

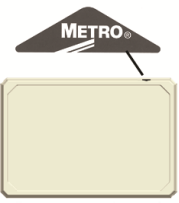
		
---	---	---

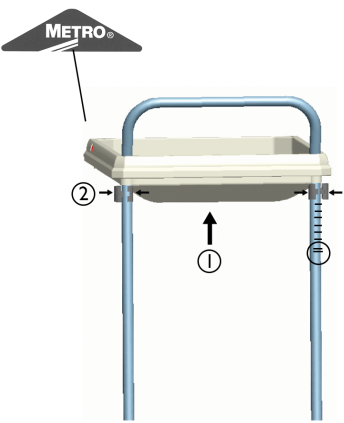
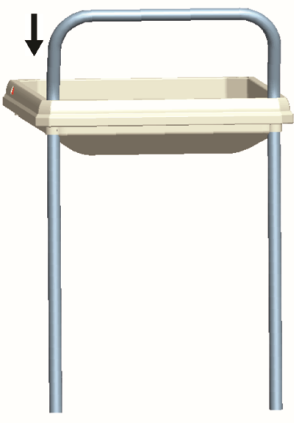


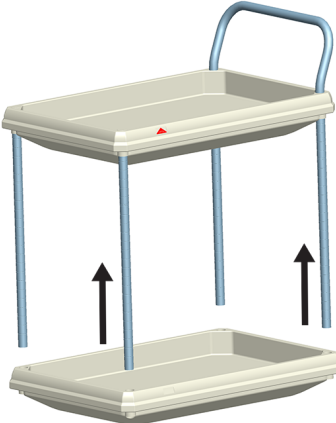
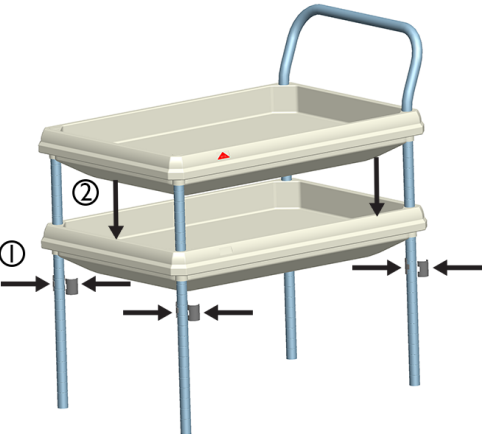
⚠ ВНИМАНИЕ

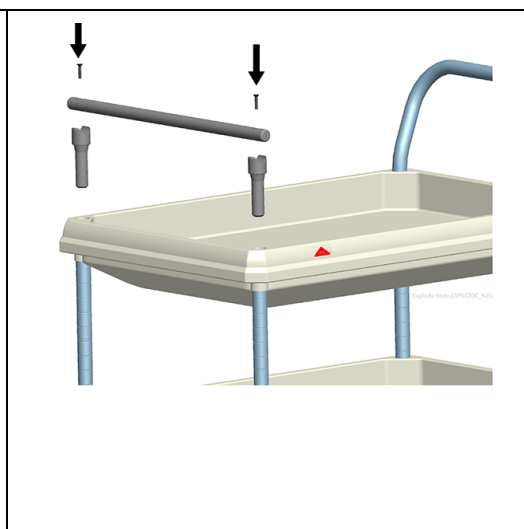
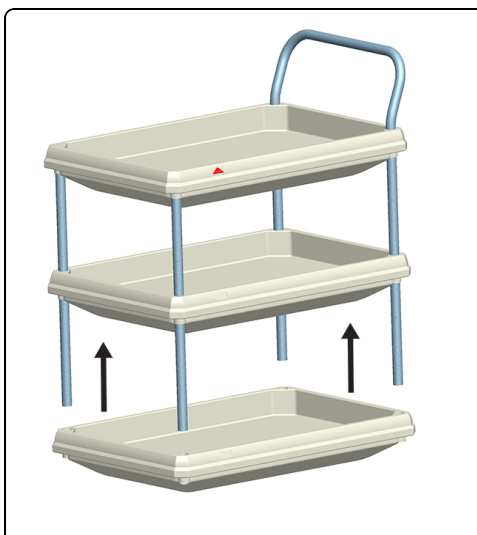
- Запрещается эксплуатация изделия с признаками повреждения.
- Не превышайте допустимую нагрузку на полку 68 кг (150 фунтов) и общую нагрузку на модуль 182 кг (400 фунтов).
- Полки должны быть собраны до установки роликов.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ:

 Body Pro-Lok™ Каталог	 Верхняя полка обозначена логотипом Metro x1  Средняя и нижняя полки x2	 Штанга x2	 Рукоятка x1	 Винт x2  Разделенный рукав x12  Стойка направляющей x2  Ролик x4  Направляющая x1
--	---	--	---	--

	Установите разрезные втулки с шестью пазами выше двойного паза Site Select™.		Надвиньте верхнюю полку на разрезные рукава. Для правильной установки над верхней полкой не должно быть никаких пазов.
--	---	---	---

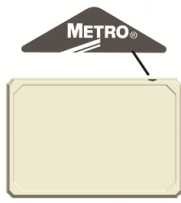
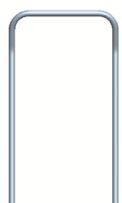
		
---	---	---

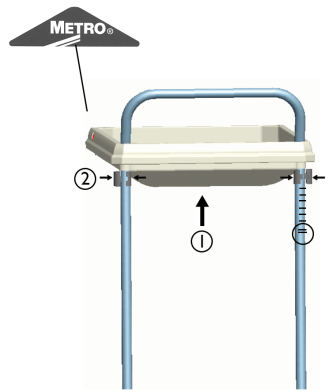


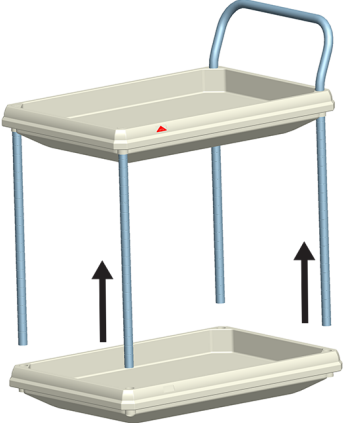
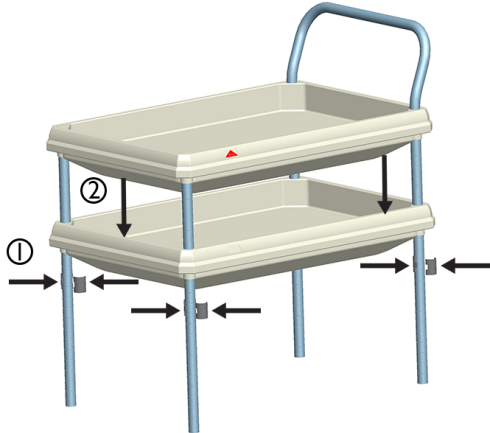
⚠ OPOZORILO

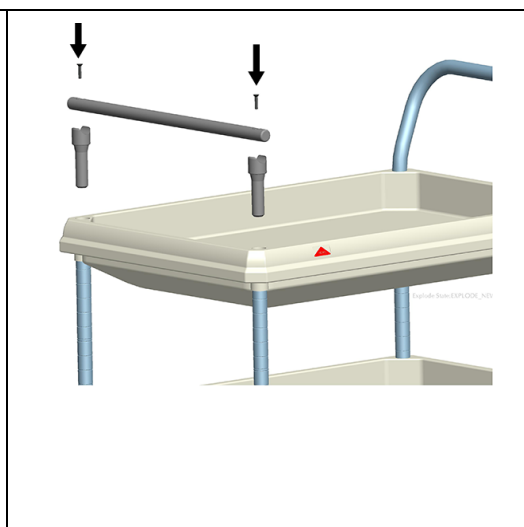
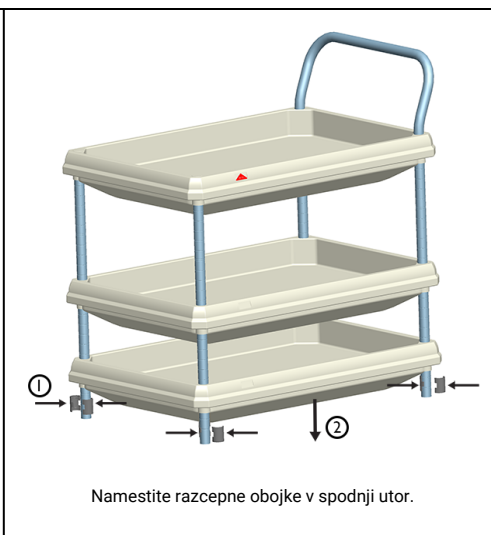
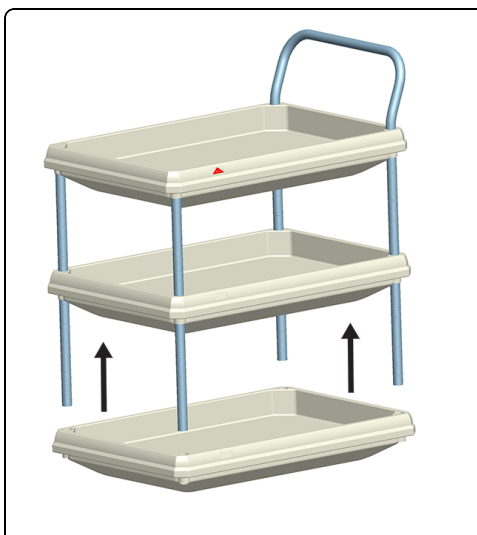
- Ne uporabljajte, če je naprava poškodovana.
- Ne preokoracite obremenitve police 150 lbs (68kg) in celotne zmogljivosti enote 400 lbs (182kg).
- Police morate zmontirati pred kolesi.

SEZNAM SESTAVNIH DELOV:

 Body Pro-Lok™ Voziček	 Zgornja polica, označena z logotipom Metro x1  Sredinske in spodnje police x2	 Drog x2	 Ročka x1	 Vijak x2  Razcepna puša x12  Steber vodila x2  Kolesce x4  Vodilo x1
--	--	--	---	---

	Namestite razcepne obojke šest utorov navzgor od dvojnega utora Site Select™.		Potisnite zgornjo polico na razcepne puše. Ob ustrezni namestitvi nad zgornjo polico ne sme biti nobenih utorov.
--	--	---	---

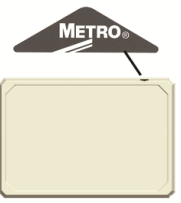
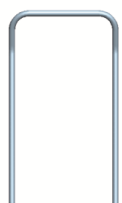
		
---	---	---

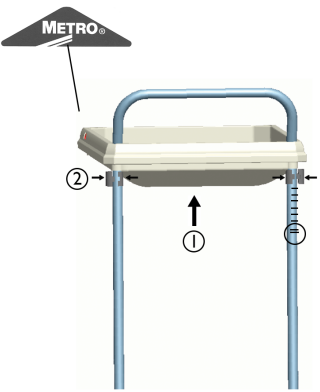


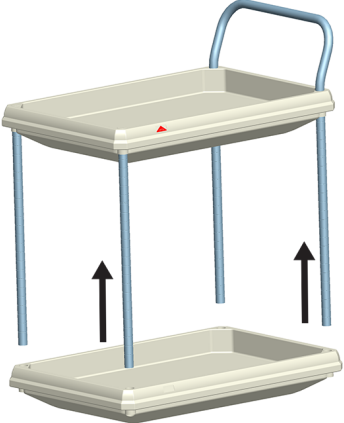
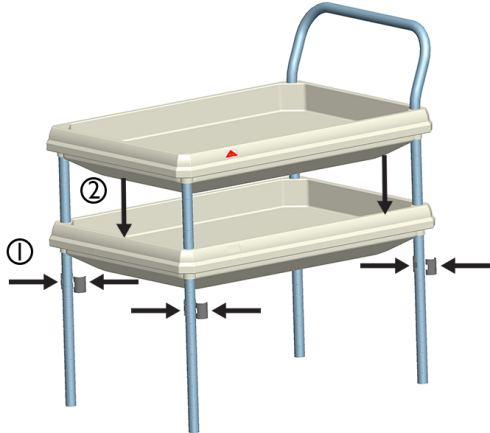
⚠ ADVERTENCIA

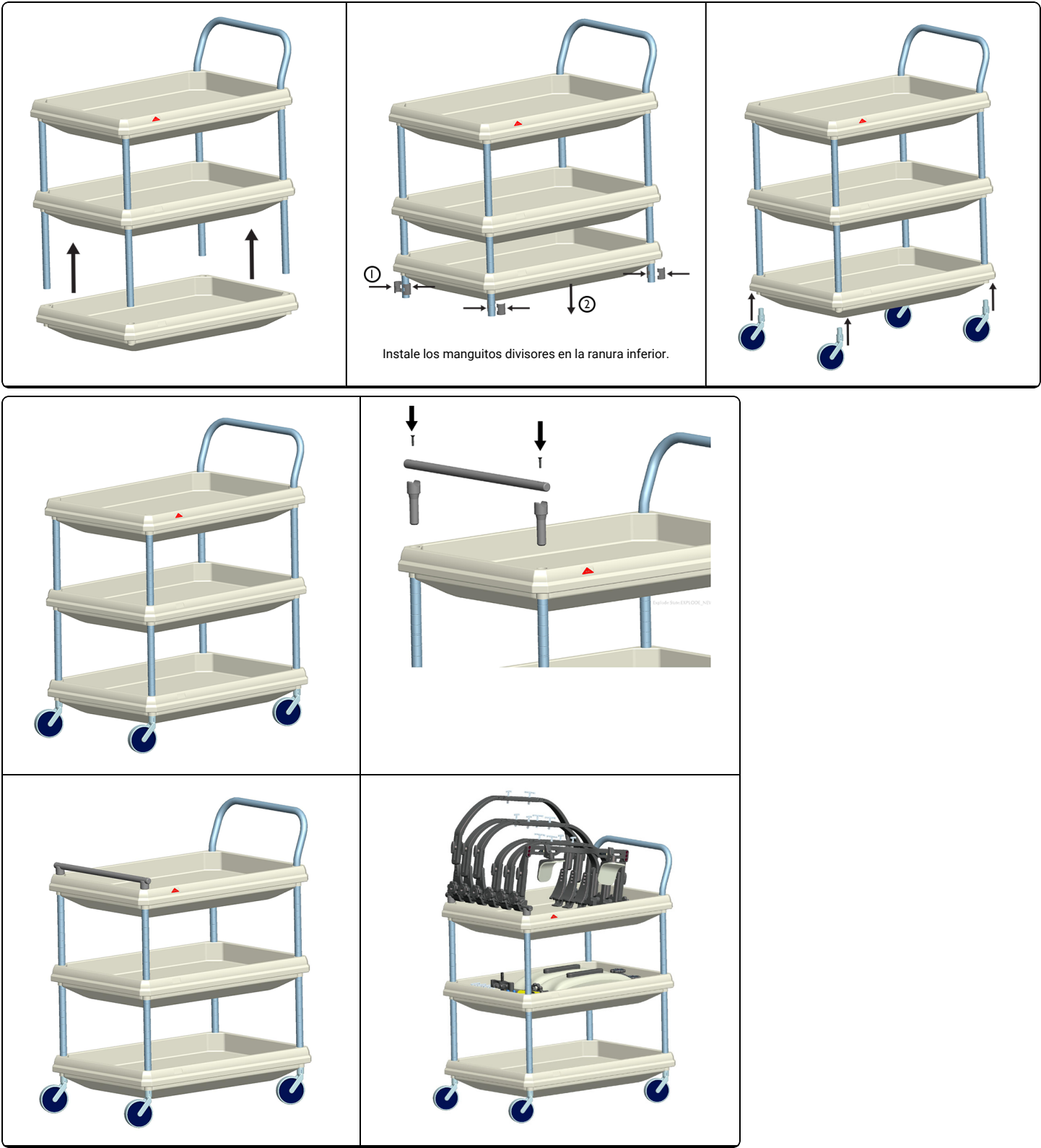
- No utilice el aparato si presenta signos de estar dañado.
- No sobrepase la capacidad de carga de los estantes de 68 kg (150 lbs) ni la capacidad total de carga de 182 kg (400 lbs).
- Los estantes deben montarse antes de las ruedas.

LISTA DE COMPONENTES:

 Carro Body Pro-Lok™	 Estante superior identificado con logotipo Metro® x1  Estantes medio e inferior x2	 Poste x2	 Asa x1	 Tornillo x2  Manguito divisor x12  Poste con riel x2  Rueda x4  Riel x1
--	---	---	---	--

	Instale los manguitos divisores seis ranuras por encima de la ranura doble Site Select™.		Meta el estante superior en los manguitos divisores. Para conseguir una instalación correcta no debe haber ninguna ranura expuesta por encima del estante superior.
--	---	---	--

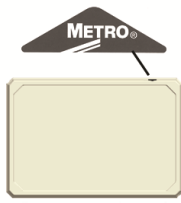
		
---	---	---

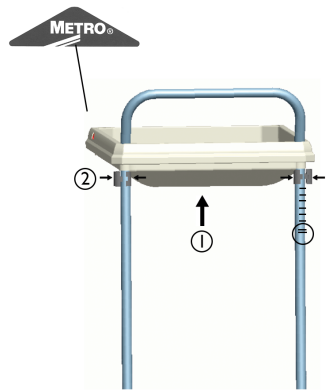


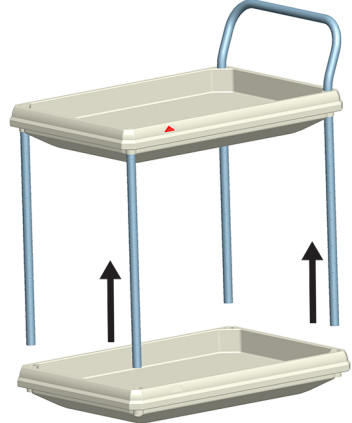
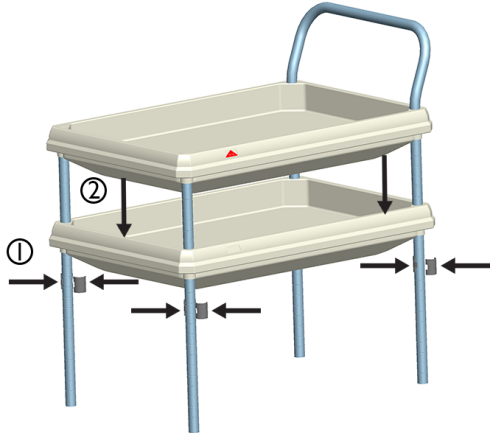
⚠ VARNING

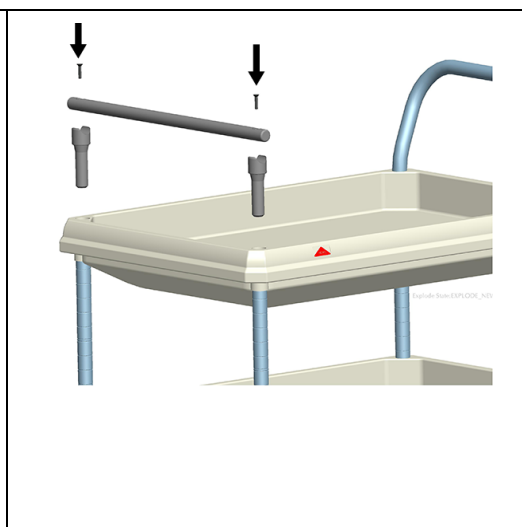
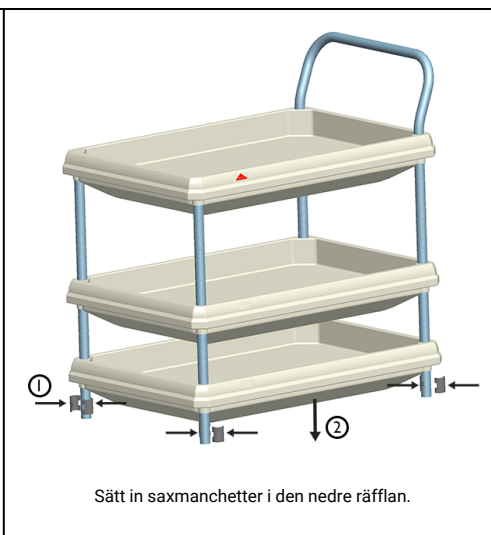
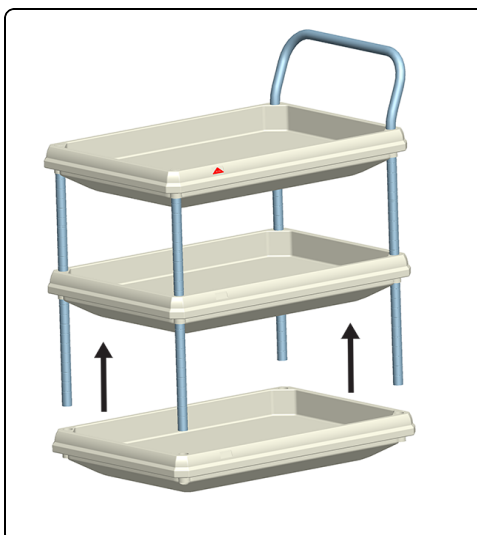
- Om emballaget verkar vara skadat ska produkten ej användas.
- Överskrid inte en hyllastkapacitet på 68 kg (150 lbs) och en total enhetskapacitet på 182 kg (400 lbs).
- Hyllorna måste monteras före hjulen.

LISTA MED KOMPONENTER:

 Body Pro-Lok™-vagn	 Övre hylla identifierad med Metro®-logotyp x1  Mellanhylla och nedre hylla x2	 Stolpe x2	 Handtag x1	 Skruv x2  Saxmanchett x12  Skenpost x2  Hjuls x4  Skena x1
---	--	--	---	---

	Installera räfflade saxmanchetter upp från Site Select™-dubbelräfflingen.		Dra upp hyllan på saxmanchetterna. Vid riktig installation ska inte några räfflor vara exponerade ovanför den övre hyllan.
--	--	---	---

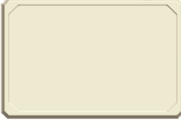
		
---	---	---

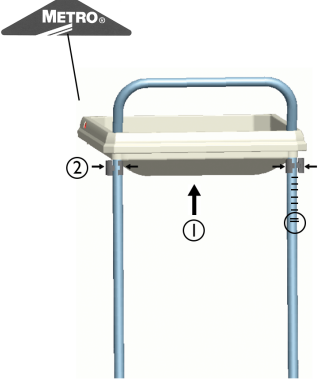
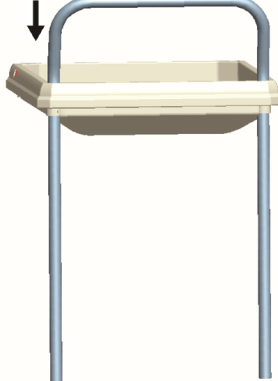


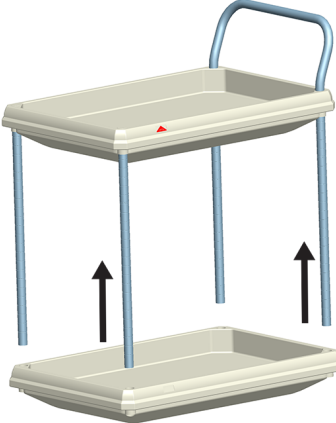
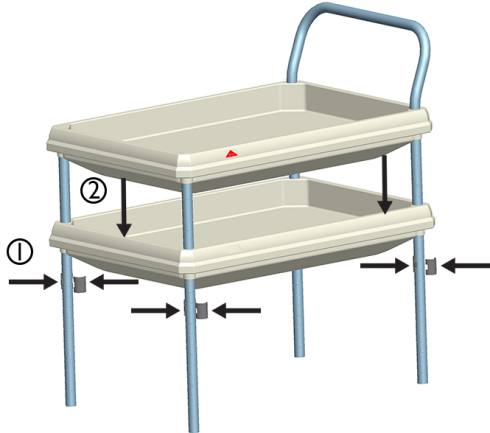
⚠ UYARI

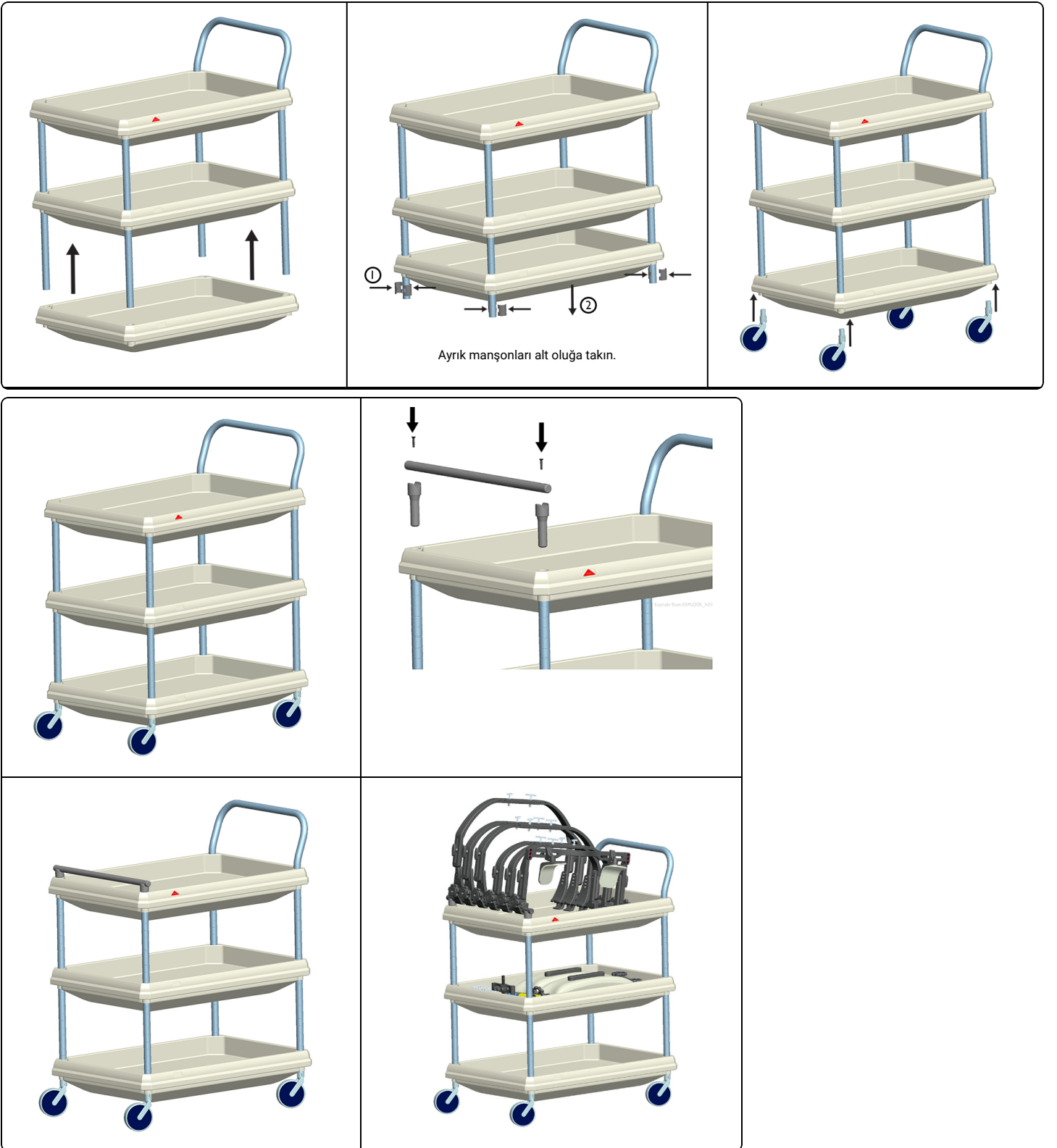
- Cihaz hasarlı görünüyorsa kullanmayın.
- 150 lbs (68 kg) raf ağırlığını ve 400 lbs (182 kg) toplam birim kapasitesini aşmayın.
- Raflar tekerleklerden önce monte edilmelidir.

BİLEŞENLERİN LİSTESİ:

 Body Pro-Lok™ Araba	 Metro Logosu ile belirtilen Üst Raf x1  Orta ve alt raflar x2	 Direk x2	 Kulp x1	 Vida x2  Ayrık Manşon x12  Parmaklık Direği x2  Tekerlek x4  Parmaklık x1
--	--	---	--	--

	Ayrık manşonlarını Site Select™ çift oluğundan altı oluk yukarıya takın.		Üst rafı ayırık manşonlar üzerine kaydırın. Doğru montaj için üst rafın üzerinde açıkta herhangi bir oluk olmamalıdır.
--	---	---	---

		
---	---	---





 MEDTEC LLC
1401 8th Street SE
Orange City, IA 51041
United States
info@cqmedical.com

COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED. CQ MEDICAL IS A TRADEMARK OF MEDTEC LLC. BODY PRO-LOK IS A TRADEMARK OF MEDTEC LLC. ALL OTHER TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. PRINTED IN USA.

www.CQmedical.com