




ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

RT-4551KVCL

Επιφάνεια κλίνης kVue™ Calypso
με τεχνολογία κινούμενων ραγών

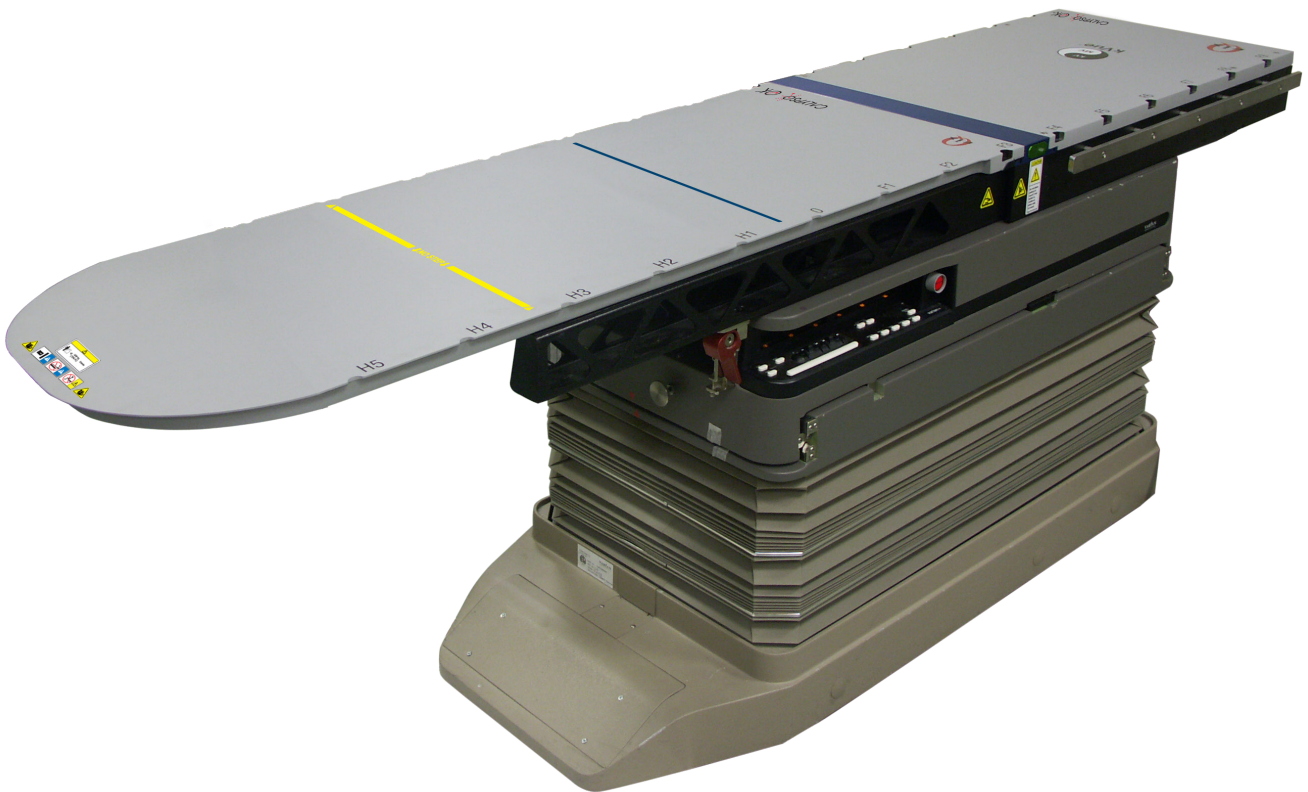

 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Οι ονομασίες kVue και OneTouch είναι εμπορικά σήματα της Qfix.

Οι ονομασίες Exact®, ETR®, Calypso® και Beacon® είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Varian Medical Systems.

Η ονομασία TrueBeam είναι εμπορικό σήμα της Varian Medical Systems.

Η ονομασία Precise® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Elekta AB.

Οι ονομασίες ZXT και TxT είναι εμπορικά σήματα της Siemens AG.

Η ονομασία Cidex® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Johnson & Johnson.

Η ονομασία Clorox® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της The Clorox Company.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΧΤΕΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΗ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ CQ MEDICAL ΣΤΟ +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 Η ΣΤΟ SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΤΟ ΟΝΕΤΟΥΧ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CQ MEDICAL ΚΝΥΕ. ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CQ MEDICAL ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ CQ MEDICAL ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Αναφέρετε τυχόν σοβαρά συμβάντα (π.χ. συμβάντα που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό) τόσο στην CQ Medical όσο και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Όταν συνδυάζεται με βάση κλίνης OEM, το ονομαστικό φορτίο είναι το μικρότερο από τα δύο ασφαλή φορτία εργασίας. Το φορτίο στην επιφάνεια κλίνης kVue ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τις αρχικές προδιαγραφές του κατασκευαστή της βάσης της κλίνης. Ανατρέξτε στη βιβλιογραφία του προϊόντος που παρέχεται από τον αρχικό κατασκευαστή.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του kVue ή του κυλίνδρου για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό ή τραυματισμού του ασθενούς. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας κινήσεων που παρέχουν οι βάσεις της κλίνης και οι κεφαλές θεραπείας, ενδέχεται να προκύψουν καταστάσεις όπου το ένθετο kVue συγκρούεται με άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Ανατρέξτε στον ιστότοπο CQmedical.com για μια παράθεση των συμβόλων και των ορισμών τους.



ΣΥΜΒΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CALYPSO®

Υποδεικνύει ότι το Calypso είναι συμβατό όταν χρησιμοποιείται με το kVue Calypso.

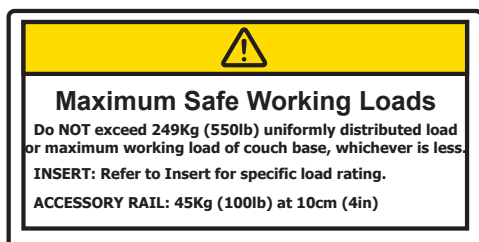


ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΜΗΝ υπερβαίνετε τα 249 kg (550 λίβ.) σε ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο ή σε μέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας στη βάση της κλίνης, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

Η ονομαστική τιμή φορτίου για κάθε ένθετο kVue Calypso καθορίζεται στις οδηγίες του ένθετου kVue Calypso.

Η ονομαστική τιμή φορτίου της βοηθητικής ράγας είναι 45 kg (100 λίβ.) στα 10 cm (4 ίν.).


↓ NO STEP ↓

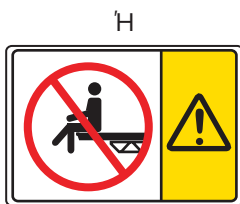

ΓΡΑΜΜΗ «NO STEP» (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Η κίτρινη γραμμή στο ένθετο kVue Calypso αντιπροσωπεύει το άκρο των δοκών υποστήριξης. Η περιοχή πέρα από τη γραμμή έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για να υποστηρίξει το άνω μέρος του κορμού του ασθενούς. ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει ολόκληρο το φορτίο του ασθενούς.

Εάν πατάτε ή κάθεστε στο ένθετο kVue Calypso πέρα από τη γραμμή «No Step» (Απαγόρευση στήριξης), ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο ένθετο kVue Calypso.

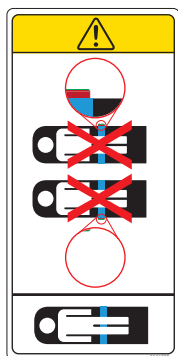

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΝΕΤΟΥΧ™

Τοποθετήστε τον ασθενή στο kVue Calypso ΜΟΝΟ όταν το κόκκινο περίβλημα του κουμπιού ασφάλισης δεν είναι ορατό. Η ασφάλεια OneTouch διαθέτει ενσωματωμένη ένδειξη για την επαλήθευση της σωστής σύμπλεξης. Εάν το κόκκινο περίβλημα του κουμπιού ασφάλισης είναι ορατό, ο μηχανισμός ασφάλισης δεν είναι ενεργοποιημένος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ



ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του kVue Calypso για την αποφυγή τραυματισμού του ασθενούς. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή για την ελαχιστοποίηση των σημείων εγκλωβισμού και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με το kVue Calypso. Τα συνήθη σημεία εγκλωβισμού περιλαμβάνουν τα εξής:

- Μεταξύ του ένθετου kVue Calypso και της ασφάλειας One-Touch
- Μεταξύ του ένθετου kVue Calypso και των δοκών υποστήριξης
- Μεταξύ του kVue Calypso και άλλων τμημάτων εξοπλισμού στην αίθουσα θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής θεραπείας Linac.



Ή



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ KVue CALYPSO

! ΜΗΝ ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ KVue CALYPSO !

Οι εφαρμοζόμενες καρφίδες ενδέχεται να λυγίσουν ή να σπάσουν και να καταστήσουν το kVue Calypso μη λειτουργικό.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της επιφάνειας κλίνης kVue RT-4551KV για οδηγίες εγκατάστασης και αφαίρεσης του kVue.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΜΗΝ υπερβαίνετε τα 200 kg (440 λίβ.) σε ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο ή σε μέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας στη βάση της κλίνης, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο, κατά τη χρήση με τη βάση κλίνης Varian Exact® ή TrueBeam™.

ΜΗΝ υπερβαίνετε τα 155 kg (341 λίβ.) σε ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο ή σε μέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας στη βάση της κλίνης, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο, κατά τη χρήση με το Varian PRS.

VARIAN EXACT® / TRUEBEAM™ COUCH BASE	
	< 200 kg (440 lb)
VARIAN PRS	
	< 155 kg (341 lb)

2004413_B

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το τεχνολογικό προϊόν προορίζεται για την ακινητοποίηση, την τοποθέτηση και την επανατοποθέτηση ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών περιορίζει την πώληση αυτού του τεχνολογικού προϊόντος από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή διαγνωστικές διαδικασίες απεικόνισης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο προβλεπόμενος χρήστης των προϊόντων είναι το καταρτισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κανονιστικής περιοχής άτομο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το kVue Calypso είναι μια υπερσύγχρονη επιφάνεια κλίνης ακτινοθεραπείας, βελτιστοποιημένη για τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και σχεδιασμένη ώστε να είναι συμβατή με το σύστημα Calypso®. Έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την ακριβή και επαναλήψιμη τοποθέτηση ασθενούς με ακρίβεια μικρότερη του χιλιοστού. Το kVue Calypso είναι μια έκδοση της σειράς προϊόντων kVue. Είναι κατασκευασμένο από προηγμένα σύνθετα υλικά ινών υψηλής αντοχής, τα οποία δεν περιέχουν μέταλλο και δεν είναι αγωγίμα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το σύστημα Calypso. Το kVue Calypso προσθέτει σημαντική ευελιξία στην αίθουσα θεραπείας και επιτρέπει τη χρήση των περισσότερων τυπικών τεχνολογικών προϊόντων ακριβούς τοποθέτησης.

Το kVue Calypso έχει σχεδιαστεί για κορυφαία απόδοση κατά τη χρήση με απεικόνιση kilovoltage, όπως CT κωνικής δέσμης, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη δόση στο δέρμα για θεραπείες που διέρχονται από την κλίνη. Αυτό, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αντιμετάθεσης των ένθετων kVue Calypso για ένα μεγάλο εύρος ένθετων kVue, καθιστά το kVue Calypso μία από τις πιο προηγμένες λύσεις που είναι διαθέσιμες για την τοποθέτηση ασθενούς IMRT και IGRT.

Οι εκδόσεις του kVue Calypso είναι διαθέσιμες για κλίνες Elekta Precise®, Varian TrueBeam™, Varian ETR®, Varian Exact®, Siemens ZXT™ και Siemens TxT™.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ένθετο kVue Calypso

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΛΙΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CALYPSO

Το σύστημα Calypso χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά σήματα για την ανίχνευση της θέσης των εμφυτευμένων ηλεκτρομαγνητικών αναμεταδοτών Beacon® και τον εντοπισμό της θέσης στόχου της θεραπείας κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Η ακρίβεια του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί από αγώγιμα υλικά κοντά στους αναμεταδότες Beacon κατά την τοποθέτηση. Έχουν διεξαχθεί εκτεταμένες δοκιμές στο kVue Calypso, καθώς και σε όλα τα παρελκόμενα που είναι συμβατά με το σύστημα Calypso. Κατά τη χρήση του συστήματος Calypso, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο παρελκόμενα συμβατά με το σύστημα Calypso. Επικοινωνήστε με τη Varian Medical Systems για μια λίστα συμβατών παρελκομένων.

Το kVue Calypso είναι το πλήρες σύστημα στήριξης ασθενούς, εκτός από την αρχική βάση κλίνης εξοπλισμού. Αποτελείται από το πλαίσιο βάσης (συμπεριλαμβανομένων των δοκών υποστήριξης), την πλάκα διεπαφής (εάν απαιτείται) και το κατάλληλο ένθετο kVue Calypso.

ΡΑΒΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CALYPSO


Η συμβατή με το σύστημα Calypso ράβδος τοποθέτησης είναι κατασκευασμένη από μη αγώγιμα υλικά και προσαρμόζεται στις εγχοπές τοποθέτησης του kVue Calypso, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 140 mm στην επιφάνεια του ασθενούς. Διαθέτει (2) καρφίδες τοποθέτησης που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζουν με τα αξεσουάρ που είναι συμβατά με το σύστημα Calypso, καθώς και με άλλα παρελκόμενα της CQ Medical. Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα Calypso, χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα συμβατά με το Calypso.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΓΚΟΠΕΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


Το ένθετο kVue Calypso και το βασικό τμήμα διαθέτουν εγκοπές ακριβούς τοποθέτησης kVue Calypso, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 140 mm, που είναι το τρέχον βιομηχανικό πρότυπο. Αυτές οι εγκοπές χρησιμοποιούνται για την ακριβή τοποθέτηση της συμβατής με το σύστημα Calypso μη αγώγιμης ράβδου τοποθέτησης. Οι εγκοπές ακριβούς τοποθέτησης του kVue Calypso συμβάλλουν στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος Calypso, αποτρέποντας την ακούσια χρήση τυπικών, μεταλλικών ή αγώγιμων ράβδων τοποθέτησης και παρελκομένων τοποθέτησης κατά την τοποθέτηση στόχου με το σύστημα Calypso.

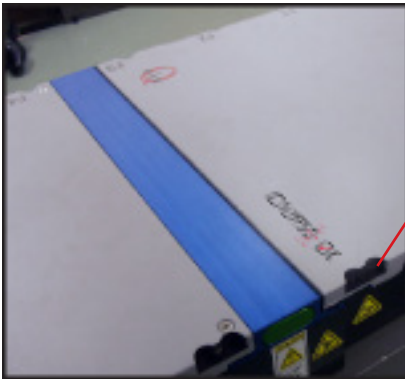

Εγκοπές ακριβούς τοποθέτησης

ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΗ ΙΣΟΚΕΝΤΡΟΥ

Το ένθετο kVue Calypso επισημαίνεται με μια μπλε γραμμή που αντιπροσωπεύει την πιο απομακρυσμένη θέση για το ισόκεντρο όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Calypso. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Varian Medical Systems ή ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος Calypso για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη σπουδαιότητα αυτής της γραμμής.

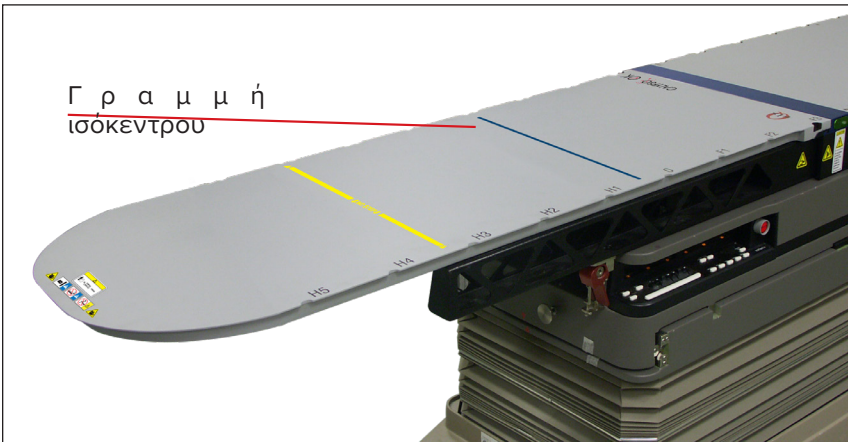

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ kVue


Το kVue είναι σχεδιασμένο ώστε να ταιριάζει με όλα τα κύρια συστήματα ακτινοθεραπείας. Η γρήγορη εγκατάσταση ελαχιστοποιεί τον χρόνο διακοπής λειτουργίας του γραμμικού επιταχυντή κατά την εγκατάσταση. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της επιφάνειας κλίνης kVue.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της επιφάνειας κλίνης kVue, το τελικό ύψος της επιφάνειας του kVue ενδέχεται να διαφέρει από το αρχικό σύστημα. Ανατρέξτε στις αρχικές οδηγίες του συστήματος για να μηδενίσετε το σύστημα (αρχή του άξονα) πριν από την αρχική χρήση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ kVue

1. Τοποθετήστε το ένθετο kVue Calypso επάνω από τις δοκούς υποστήριξης και ευθυγραμμίστε τις δύο εφαρμοζόμενες καρφίδες με τις οπές υποδοχής στην ασφάλεια OneTouch.
2. Από το άκρο κεφαλής του kVue, σύρετε το ένθετο kVue Calypso απευθείας μέσα στις οπές υποδοχής.

Θα ακούσετε έναν ήχο κλικ όταν το ένθετο kVue Calypso έχει ασφαλίσει στη θέση του. ΜΟΝΟ η επιφάνεια του πράσινου κουμπιού θα πρέπει να είναι ορατή όταν έχει εγκατασταθεί σωστά.

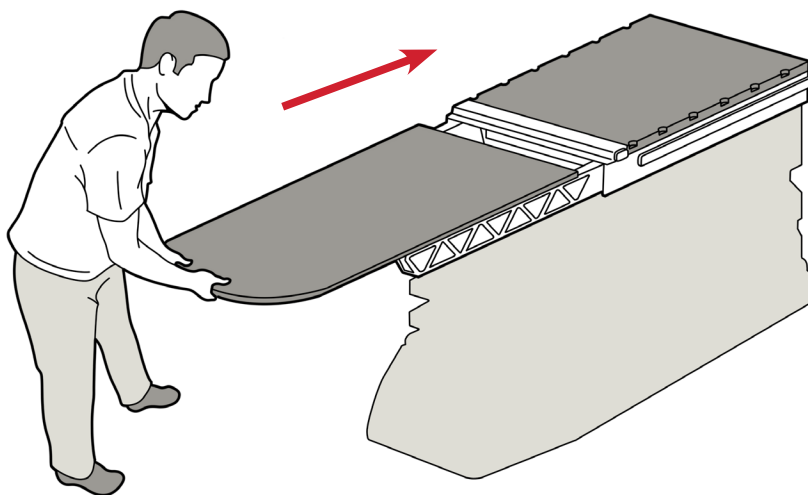

kVue με τυπικό ένθετο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αυτή η ράβδος είναι εγκεκριμένη για χρήση με το σύστημα Calypso.

Για να εγκαταστήσετε τις ράβδους τοποθέτησης, τοποθετήστε οποιοδήποτε από τα δύο άκρα της ράβδου στις κατάλληλες εγκοπές του kVue Calypso και κουμπώστε το στη θέση του. Η δεξιά πλευρά του kVue Calypso έχει διπλές εγκοπές και η αριστερή πλευρά έχει μονές εγκοπές. Αυτό το χαρακτηριστικό βελτιώνει την ακρίβεια τοποθέτησης και αποτρέπει τη χρήση μη εγκεκριμένων ράβδων τοποθέτησης.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ





ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τραβήξτε προς τα επάνω και τα δύο άκρα της ράβδου τοποθέτησης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ ΚVUE CALYPSO

! ΜΗΝ ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ ΚVUE CALYPSO ! ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΙΒΑΡΟΣ, ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΥΓΙΣΟΥΝ Η ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚVUE CALYPSO ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ.

1. Περιστρέψτε τον μοχλό αριστερόστροφα.
2. Τραβήξτε τον περιστρεφόμενο μοχλό από τη μία πλευρά του κVue Calypso έως ότου απελευθερωθεί το ένθετο κVue Calypso.
3. Σύρετε το ένθετο κVue Calypso μακριά από το κVue Calypso.

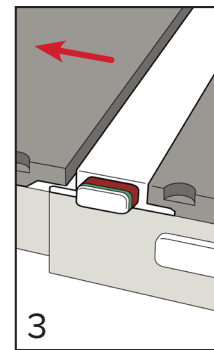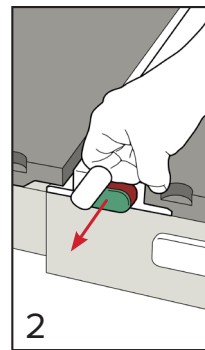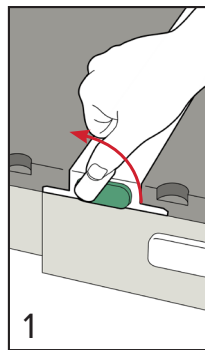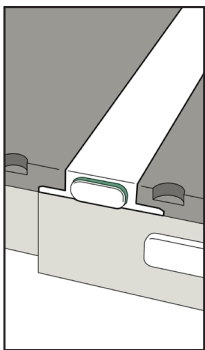

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το τεχνολογικό προϊόν μπορεί να καθαριστεί με ένα ήπιο, μη λειαντικό καθαριστικό ή με απολυμαντικό διάλυμα. Μην ψεκάζετε και μην χύνετε υγρά στην επιφάνεια του kVue Calypso, διότι ενδέχεται να εισχωρήσουν στην ασφάλεια OneTouch ή στους μηχανισμούς στη βάση της κλίνης. Για τον καθαρισμό, εφαρμόστε διάλυμα σε καθαρό πανί και σκουπίστε την επιφάνεια.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα παρακάτω υλικά καθαρισμού έχουν υποβληθεί σε δοκιμή και έχει διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό των επιφανειών του kVue Calypso και του ένθετου kVue Calypso. Για την απολύμανση της επιφάνειας του kVue Calypso, ανατρέξτε στις συγκεκριμένες οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού παράγοντα.

- Νερό
- Διάλυμα λευκαντικού Clorox® 10%
- Ισοπροπυλική αλκοόλη
- Διάλυμα ενεργοποιημένης διαλδεΰδης Cidex® 2,4%
- Σαπούνι και νερό

ΜΗΝ ψεκάζετε απευθείας στο kVue Calypso ή στο ένθετο kVue Calypso και μην επιτρέπετε να εισχωρήσουν υγρά στο πλαίσιο βάσης.

ΜΗΝ τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στο kVue Calypso ή στο ένθετο kVue Calypso.

Εάν εισέλθουν σωματικά υγρά στο πλαίσιο βάσης, αφαιρέστε τις έξι βίδες που συνδέουν το πίσω πλαίσιο και καθαρίστε το κατάλληλα. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση το νερό στη ράγα του γραμμικού εδράνου. Μετά τον καθαρισμό, λιπάνετε τη ράγα του γραμμικού εδράνου με φθοριοπολυμερές (PTFE) λιπαντικό ξηρού φιλμ.

Η ασφάλεια OneTouch απαιτεί περιοδική λίπανση. Ανατρέξτε στις συγκεκριμένες οδηγίες για τον σωστό τρόπο λίπανσης και καθαρισμού της ασφάλειας OneTouch.

Η αποσυναρμολόγηση της ασφάλειας OneTouch θα ακυρώσει την εγγύηση του kVue Calypso.

Ελέγχετε περιοδικά τη σύσφιξη όλων των συνδέσμων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΕΤΟΥΧ

Συνιστάται να εκτελείτε αυτήν τη διαδικασία κάθε μήνα.


Κατάλογος υλικών: φθοριοπολυμερές (PTFE) λιπαντικό ξηρού φιλμ, μπατονέτες και στεγνά μαντιλάκια ή χαρτοπετσέτες

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τη διαδικασία που εκτελείται σε ένα κVue, αλλά η διαδικασία είναι η ίδια για το κVue Calypso.


1. Αφαιρέστε το ένθετο κVue Calypso. (Εικ. 1)
2. Σκουπίστε τυχόν χνούδια ή υπολείμματα από το εξωτερικό μέρος της ασφάλειας. (Εικ. 2)
3. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή μπατονέτα για να καθαρίσετε το εσωτερικό των οπών υποδοχής. (Εικ. 3)
4. Ψεκάστε λιπαντικό στις οπές υποδοχής. (Εικ. 4)
5. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή μπατονέτα για να σκουπίσετε τα χνούδια και τα υπολείμματα. (Εικ. 3)
6. Ψεκάστε εκ νέου λιπαντικό στις οπές υποδοχής. (Εικ. 4)
7. Ψεκάστε λιπαντικό στο κενό ανάμεσα στο επάνω μέρος του κουμπιού και στο περίβλημα της ασφάλειας, για να λιπάνετε τα εσωτερικά εξαρτήματα. (Εικ. 5)
8. Επανατοποθετήστε το ένθετο κVue Calypso και εξαγάγετε το τραβώντας την ασφάλεια από την αντίθετη πλευρά. Επαναλάβετε το βήμα 7 της λίπανσης.
9. Εκτελέστε εγκατάσταση και αφαίρεση του ένθετου κVue Calypso 3 έως 4 φορές και επαναλάβετε τη διαδικασία λίπανσης, εάν δεν εξάγεται άνετα.
10. Σκουπίστε τυχόν πλεονάζον λιπαντικό από το εξωτερικό της ασφάλειας OneTouch.

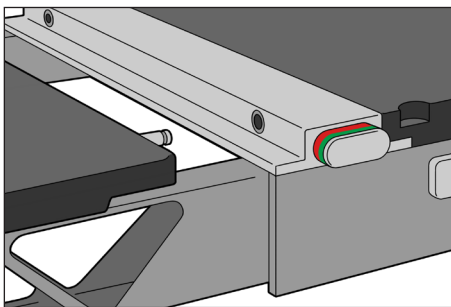


Εικ. 1

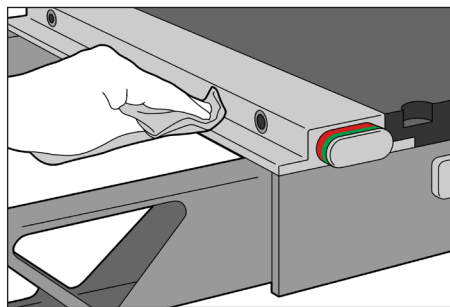


Εικ. 2

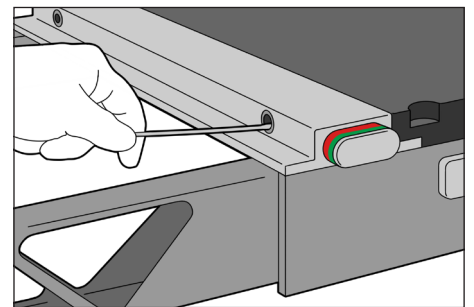

Εικ. 3

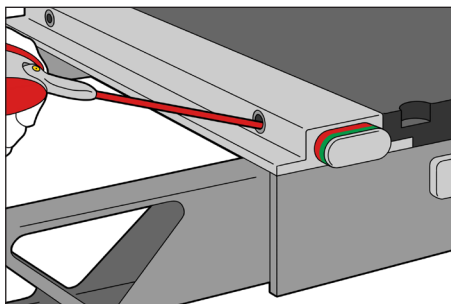


Εικ. 4

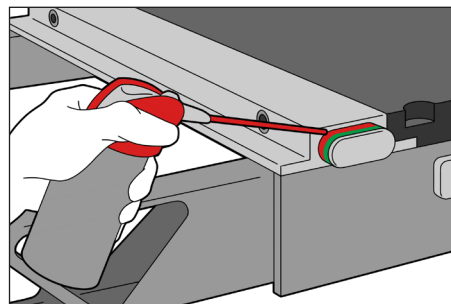

Εικ. 5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΥΒΕ ΜΕ ΤΥΠΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

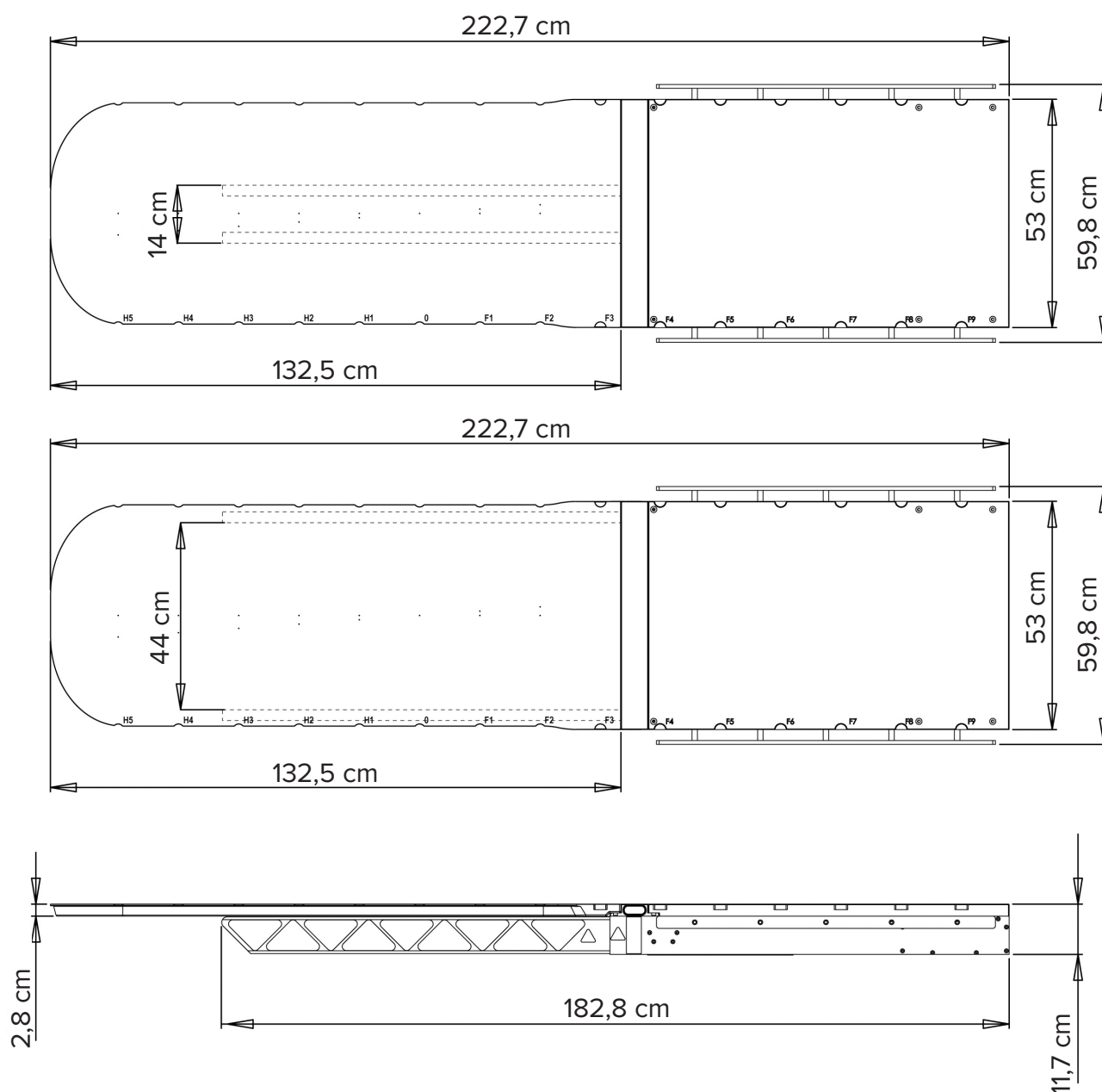

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Για προδιαγραφές σχετικά με μεμονωμένα ένθετα kVue Calypso, ανατρέξτε στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης του ένθετου kVue Calypso.



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com