




คู่มือ ผลิตภัณฑ์ และคู่มือ สำหรับผู้ใช้

RT-4551KVCL

พื้นที่ ยาง kVue™ Calypso
พร้อมเทคโนโลยี รางเคลื่อนที่

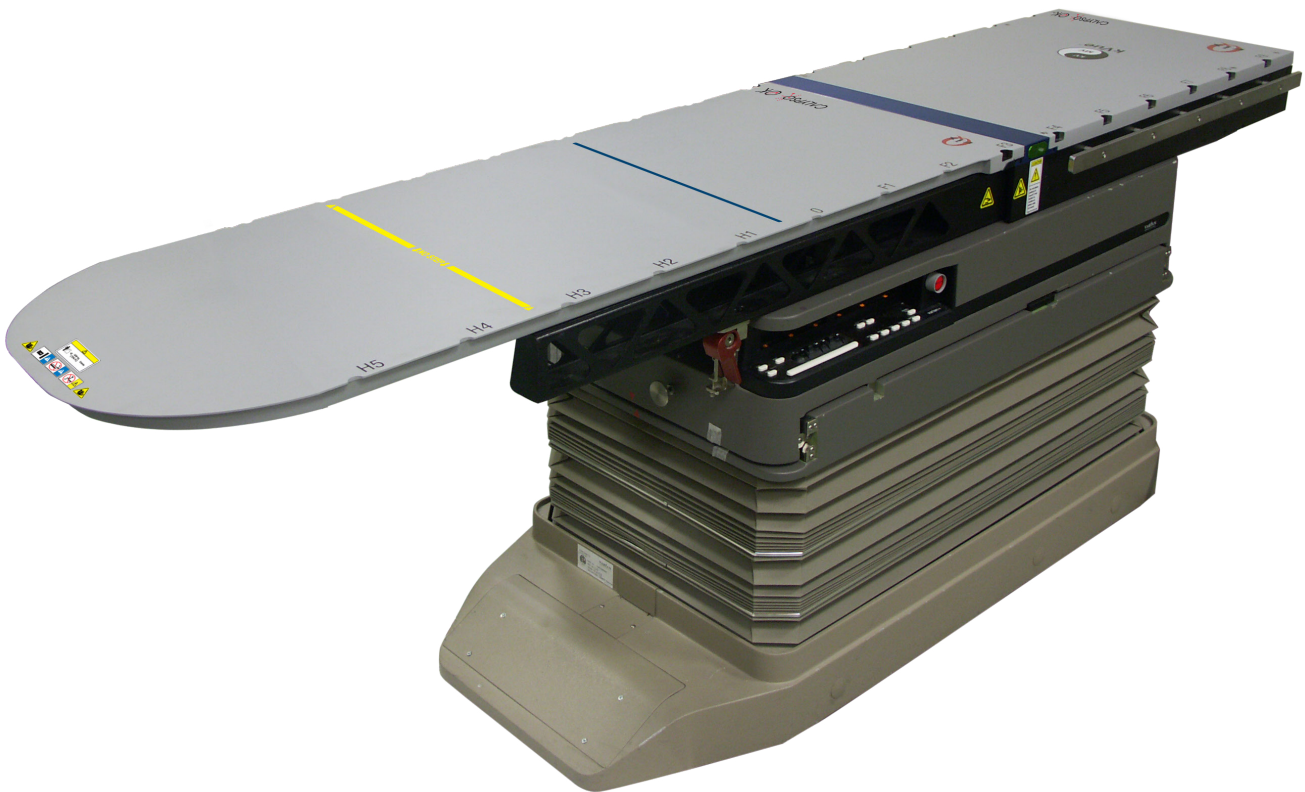

 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

kVue และ OneTouch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Qfix

Exact®, ETR®, Calypso® และ Beacon® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Varian Medical Systems

TrueBeam เป็นเครื่องหมายการค้าของ Varian Medical Systems

Precise® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Elekta AB

ZXT และ TxT เป็นเครื่องหมายการค้าของ Siemens AG

Cidex® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Johnson & Johnson

Clorox® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ The Clorox Company

ข้อพึงระวังทั่วไป

ข้อความแจ้งเตือน

! คำเตือน ! ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงอุปกรณ์นี้ หากส่วนประกอบใดๆ ของอุปกรณ์นี้ มี โหลดการทำงานที่ มากเกินไปจนก่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรง มี ร่องรอยของความเสียหาย หรือ ทำงานไม่ถูกต้อง ให้หยุดใช้งานทันที และติดต่อ CQ MEDICAL ที่ +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 หรือ SUPPORT@CQMEDICAL.COM

! คำเตือน ! ONETOUCH เป็นกลไกที่มีความเที่ยงตรงและมีไว้ใช้กับอุปกรณ์ CQ MEDICAL KVUE ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ CQ MEDICAL ซึ่งไม่ผ่านการรับรองและไม่ได้รับการตรวจสอบโดย CQ MEDICAL อาจไม่ปลอดภัยที่จะนำมาใช้งานและจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะหากมีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

เหตุการณ์ร้ายแรง

โปรดรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ที่เกิดขึ้น (เช่น เหตุการณ์ที่ ส่งผลให้เกิดหรือ มี โอกาสส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือ การบาดเจ็บรุนแรง) ให้กับ CQ Medical และหน่วยงานที่มีอำนาจตามหน้าที่ ในประเทศของคุณทราบ

ดัชนี การรับน้ำหนัก

! หมายเหตุ ! เมื่อประกอบเข้ากับฐานเตียง OEM แล้ว ดัชนี การรับน้ำหนักจะเป็นน้ำหนักที่เป็นค่าที่ น้อยกว่าจากน้ำหนักที่สามารถรับได้อย่างปลอดภัยขณะทำงานที่ จุสองค่าน้ำหนักที่ ผู้ เติ ยง kVue สามารถรับได้ไม่ควรเกินไปจากข้อมูลจำเพาะของผู้ ผลิต ฐานเตียงเดิม โปรดดู เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ ผู้ ผลิตตรายเดิมจัดเตรียมให้

อันตรายจากการชน

ใช้ความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้าย kVue หรือโครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของอุปกรณ์หรือ การบาดเจ็บของผู้ป่วย การเคลื่อนไหวที่ หลากหลายที่เป็นไปได้จากการขยับฐานเตียงและหัวเตียงมี อธิษฐานอาจทำให้เกิดสถานการณ์ที่ แผ่นเสริม kVue อาจชนเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่ง อาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้

ข้อพึงระวังทั่วไป


ป้ายเตือนและคำอธิบาย

โปรดดูรายการสัญลักษณ์และคำอธิบายสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ที่ CQmedical.com



อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับระบบ CALYPSO®

ระบุว่า Calypso ใช้ร่วมกันได้เมื่อใช้กับ kVue Calypso

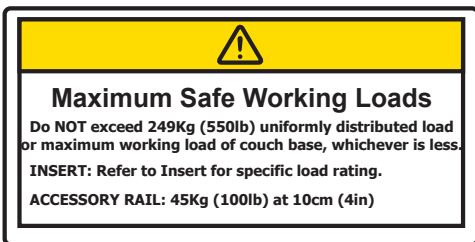

ดัชนี การรับน้ำหนัก


ห้ามใส่น้ำหนักเกิน 249 กก. (550 ปอนด์) เมื่อกระจายน้ำหนักเท่ากันหรือห้ามเกินน้ำหนักสูงสุดที่ฐานเตียงสามารถรับได้อย่างปลอดภัยในขณะใช้งานแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า

ดัชนี การรับน้ำหนักของแผ่นเสริม kVue Calypso แต่ละอันถูกระบุไว้ในคำแนะนำในการใช้แผ่นเสริม kVue Calypso

ดัชนี การรับน้ำหนักของรางเสริมเท่ากับ 45 กก. (100 ปอนด์) ที่ 10 ซม. (4 นิ้ว)

↓ NO STEP ↓

หรือ

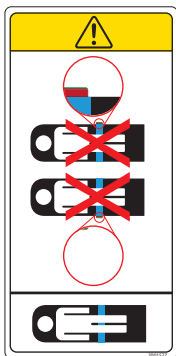

เส้น “ห้ามเหยียบ”

เส้นสีเหลืองบนแผ่นเสริม kVue Calypso แสดงถึงส่วนปลายของคานรองรับ บริเวณที่อยู่นอกเส้นได้รับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อรองรับลำตัวส่วนบนหรือส่วนล่างของผู้ป่วย ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักทั้งหมดของผู้ป่วย

การยืนหรือนั่งบนแผ่นเสริม kVue Calypso เลี่ยงจากเส้น “ห้ามเหยียบ” อาจทำให้แผ่นเสริม kVue Calypso เสียหายหรือทำให้ได้รับบาดเจ็บ

สลัก ONETOUCH™



วางผู้ป่วยบน kVue Calypso เฉพาะเมื่อมองไม่เห็นปลอกสีแดงของปุ่มสลักเท่านั้น สลัก OneTouch มีสัญลักษณ์ระบุในตัวเพื่อตรวจสอบว่ามี การใส่ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง หากมองเห็นปลอกสีแดงของปุ่มสลัก การล็อกจะไม่ทำงาน

ข้อพึงระวังทั่วไป

ป้ายเตือนและคำอธิบาย



หรือ

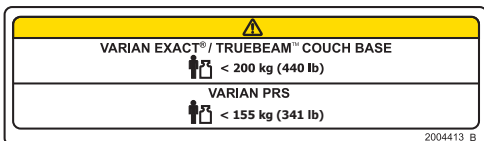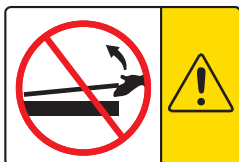

จุดที่ อาจเกิด การหนี บ

ใช้ความระมัดระวังในขณะที่เคลื่อนย้าย kVue Calypso เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ป่วยบาดเจ็บ มีการใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดจำนวนจุดที่ทำให้เกิดการหนี บได้และลดอันตรายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพื้น เติ ยง kVue Calypso ให้เหลือน้อยที่สุด จุดที่ทำให้เกิดการหนี บที่ ทั่วไปมี ดังนี้ :

- ระหว่างแผ่นเสริม m kVue Calypso และสลัก One-Touch
- ระหว่างแผ่นเสริม m kVue Calypso และคานรองรับ
- ระหว่าง kVue Calypso และชิ้นส่วนอื่นๆ ของอุปกรณ์ในห้องที่ ทำการ รักษา รวมถึง หัวอุปกรณ์รักษา Linac

การติดตั้งและถอดแผ่นเสริม m KVUE CALYPSO

! อย่ายกปลายของแผ่นเสริม m KVUE CALYPSO ขึ้น !

หมุดรองอาจจ่อหรือหัก ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งาน kVue Calypso ได้

โปรดดู คู่มือการติดตั้งพื้น เติ ยง RT-4551KV kVue เพื่อ ดู คำแนะนำในการติดตั้งและถอดพื้น เติ ยง kVue

ดัชนี การรับน้ำหนัก

ห้ามใส่น้ำหนักเกิน 200 กก. (440 ปอนด์) เมื่อกระจายน้ำหนักเท่ากันหรือห้ามเกินน้ำหนักสูงสุดที่ ฐาน เติ ยง สามารถรับได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ใช้งานร่วมกับฐาน เติ ยง Varian Exact® หรือ TrueBeam™ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า

ห้ามใส่น้ำหนักเกิน 155 กก. (341 ปอนด์) เมื่อกระจายน้ำหนักเท่ากันหรือห้ามเกินน้ำหนักสูงสุดที่ ฐาน เติ ยง สามารถรับได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ใช้งานร่วมกับ Varian PRS แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

อุปกรณ์นี้ ใช้เพื่อ อีล็กตำแหน่ง จัดตำแหน่ง และปรับตำแหน่งผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาด้วยรังสี

! หมายเหตุ ! กฎหมายสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา กำหนดให้มีการจำหน่ายอุปกรณ์นี้ โดยแพทย์หรือตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย

ผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาด้วยรังสี หรือถ่ายภาพรังสี เพื่อ อการวินิจฉัย

ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนดของภูมิภาคที่กำหนด และ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

kVue Calypso เป็นพี้นที่ที่ยกที่ใช้ในการรักษาทางรังสีที่สำคัญซึ่งปรับปรุงแต่งมาเพื่อเทคโนโลยีล่าสุดที่มีความก้าวหน้าและออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Calypso® ได้ โดยอุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้สามารถจัดตำแหน่งของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำในระดับเล็กกว่ามิลลิเมตร kVue Calypso เป็นเวอร์ชันของอุปกรณ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ kVue โดยผลิตจากคอมโพสิตไฟเบอร์ซึ่งมีความแข็งแรงสูงซึ่งปราศจากโลหะและไม่นำไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Calypso ได้ kVue Calypso ทำให้ห้องที่ใช้ทำการรักษาของคุณมีความอเนกประสงค์มากขึ้นเป็นอย่างมากและสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์จัดตำแหน่งที่มีการอ้างอิงตำแหน่งมาตรฐานส่วนใหญ่

kVue Calypso ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อใช้กับการถ่ายภาพรังสีระดับกิโลโวลต์ เช่น CT แบบคอนทราสต์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดปริมาณรังสีที่ผิวหนังได้รับการรักษาผ่านเตียง ซึ่งเมื่อรวมกับการที่สามารถเปลี่ยนแผ่นเสริม kVue Calypso เป็นแผ่นเสริม kVue หลากหลายรูปแบบได้แล้ว kVue Calypso จึงเป็นหนึ่งโซลูชันที่ล้ำหน้าที่สุดที่มีให้ใช้งานสำหรับการจัดตำแหน่งผู้ป่วย IMRT และ IGRT

kVue Calypso เวอร์ชันต่างๆ พร้อมให้ใช้งานสำหรับเตียง Elekta Precise®, Varian TrueBeam™, Varian ETR®, Varian Exact®, Siemens ZXT™ และ Siemens TXT™

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

แผ่นเสริม kVue Calypso

คุณสมบัติ

พื้นที่ที่ยังสามารถใช้กับระบบ CALYPSO ได้

ระบบ Calypso ใช้สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าในการตรวจจับตำแหน่งของตัวรับส่งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า Beacon® แบบฝัง และกำหนดตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายของการรักษาในระหว่างทำการรักษาด้วยรังสี การวางวัตถุนำไฟฟ้าไว้ใกล้กับตัวรับส่งสัญญาณ Beacon ในระหว่างการกำหนดตำแหน่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำของระบบ มีการทดสอบ kVue Calypso อย่างครอบคลุม รวมถึงการทดสอบกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่สามารถใช้กับระบบ Calypso ได้ เมื่อใช้ระบบ Calypso ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Calypso ได้เท่านั้น โปรดติดต่อ Varian Medical Systems เพื่อขอรายการอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้

kVue Calypso เป็นระบบช่วยเหลือผู้ป่วยแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่รวมฐานเตียงของอุปกรณ์เดิม โดยจะประกอบไปด้วยโครงหลัก (รวมถึงคานรองรับ) แผ่นอิเล็คโตรเฟซ (ในกรณีที่ต้องใช้) และแผ่นเสริม kVue Calypso ที่เหมาะสม

แถบระบุตำแหน่งที่ใช้งานได้กับระบบ CALYPSO

แถบระบุตำแหน่งที่ใช้งานได้กับระบบ Calypso ทำจากวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าและพอดีกับร่องอ้างอิงตำแหน่งของ kVue Calypso ที่อยู่ห่างกัน 140 มม. บนพื้นผิวของผู้ป่วย โดยแถบระบุตำแหน่งนี้มีหมุดอ้างอิงตำแหน่ง (2) ตัวที่ออกแบบมาให้รับกันได้อย่างปลอดภัยกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับระบบ Calypso รวมถึงอุปกรณ์เสริม CQ Medical อื่นๆ เมื่อใช้ระบบ Calypso ให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับ Calypso เท่านั้น



คุณสมบัติ

ร่องอ้างอิงตำแหน่ง


แผ่นเสริม kVue Calypso และส่วนฐานมี ร่องอ้างอิงตำแหน่งสำหรับ kVue Calypso ที่ เว้นห่างกันตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ในปีปัจจุบันของเราซึ่งเท่ากับ 140 มม. โดยร่องเหล่านี้ จะใช้ในการจัดตำแหน่งระบบ Calypso ให้ใช้งานได้กับแถบระบุตำแหน่งที่ไม่นำไฟฟ้า ร่องอ้างอิงตำแหน่งบน kVue Calypso ช่วยให้มั่นใจว่าระบบ Calypso จะทำงานได้อย่างถูกต้องโดยป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แถบระบุตำแหน่งแบบมาตรฐาน แบบโลหะ หรือ อแบบนำไฟฟ้า ารวมถึง จออุปกรณ์เสริม สำหรับจัดตำแหน่งในระหว่างที่มีการรักษาเฉพาะจุดตามเป้าหมายด้วยระบบ Calypso โดยไม่ได้ตั้งใจ



ร่องอ้างอิงตำแหน่ง

สายไอโซเซเลเตอร์ด้านล่าง

แผ่นเสริม kVue Calypso จะมีเครื่องหมายเส้นสีฟ้าที่แสดงถึงตำแหน่งปลายที่ไกลที่สุดสำหรับไอโซเซเลเตอร์เมื่อใช้ระบบ Calypso โปรดติดต่อตัวแทนของ Varian Medical Systems หรือ อูที่ คู่มือสำหรับผู้ ใช้ของระบบ Calypso เพื่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติม เติ มที่ เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสายนี้

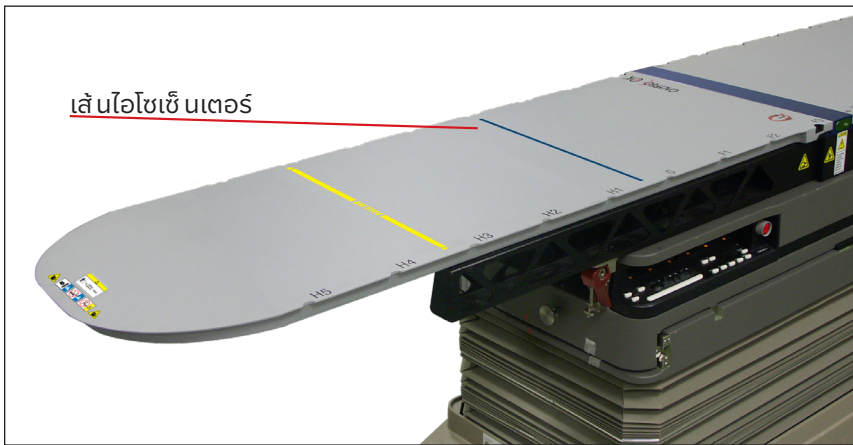

เส้นไอโซเซเลเตอร์

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

การติดตั้ง KVUE


kVue ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้ร่วมกับระบบการรักษาด้วยรังสีรักษาหลักๆ ทุกประเภท การติดตั้งที่รวดเร็วช่วยลดเวลาที่เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นไม่ได้ทำงานในระหว่างการติดตั้ง โปรดดูคู่มือการติดตั้งพีเนตียก kVue เพื่อดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการติดตั้ง

! หมายเหตุ ! ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งพีเนตียก kVue ระดับความสูงสุดท้ายของพีเนตียก kVue อาจแตกต่างจากระบบเดิม โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับระบบให้เข้ากันได้ก่อนที่จะเริ่มติดตั้ง

การติดตั้งแผ่นเสริม KVUE

- วางแผ่นเสริม kVue Calypso ไว้ที่ด้านบนของคานรองรับ จากนั้นจัดตำแหน่งหมุดรองสองตัวโดยให้รูรับอยู่ในสลัก OneTouch
- จากส่วนปลายหัวของ kVue ให้เลื่อนแผ่นเสริม kVue Calypso เข้าไปในรูรับโดยตรง

คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อแผ่นเสริม kVue Calypso ล็อกเข้าที่ หากติดตั้งถูกต้อง คุณจะเห็นเฉพาะพีเนตียกของปุ่มสี่เหลี่ยมเท่านั้น

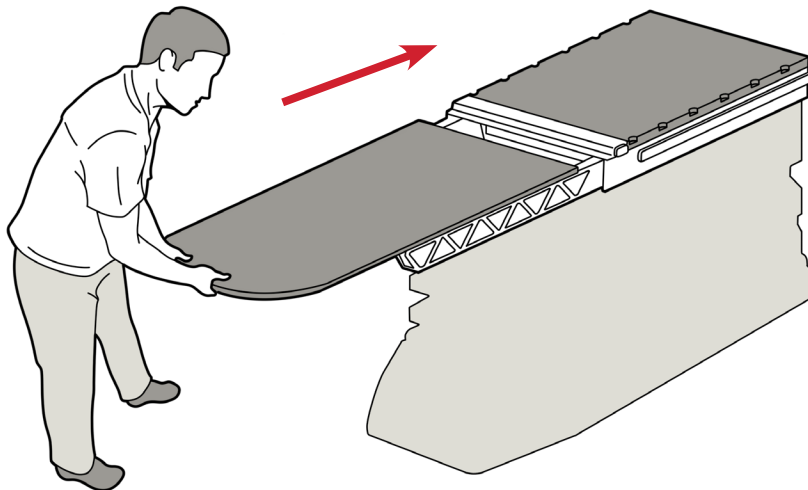

kVue พร้อมแผ่นเสริมแบบมาตรฐาน

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

การติดตั้งแถบระบุตำแหน่ง

แถบนี้ ได้รับการอนุมัติ ให้ใช้กับระบบ Calypso

หากต้องการติดตั้งแถบระบุตำแหน่ง ให้วางปลายด้านใดด้านหนึ่งของแถบในร่องของ kVue Calypso ที่เหมาะสมและกดให้เข้าที่ ด้านขวาของ kVue Calypso มี ร่องสองร่องและด้านซ้ายมี ร่องเพียงร่องเดียว คุณสมบัตินี้ ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดตำแหน่งและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แถบระบุตำแหน่งที่ไม่ได้รับการอนุมัติ



คำแนะนำในการใช้งาน

การถอดออก




การถอดแถบระบุตำแหน่ง

ดึงปลายด้านใดด้านหนึ่ง ของแถบระบุตำแหน่งขึ้น

การถอดแผ่นเสริม M KVUE Calypso

! อย่ายกปลายของแผ่นเสริม M KVUE CALYPSO ขึ้น ! แม้ว่ากลไกจะมีความทนทานมาก แต่หมุดรองอาจงอหรือหัก ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งาน KVUE CALYPSO ได้

1. หมุนคันโยกทวนเข็มนาฬิกา
2. ดึงคันโยกที่ หมุนจากด้านหนึ่ง ของ kVue Calypso จนกว่าแผ่นเสริม M kVue Calypso จะหลุดออก
3. เลื่อนแผ่นเสริม M kVue Calypso ออกจาก kVue Calypso

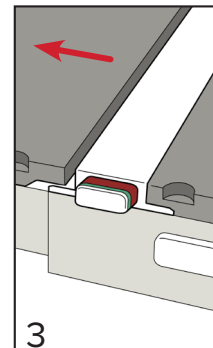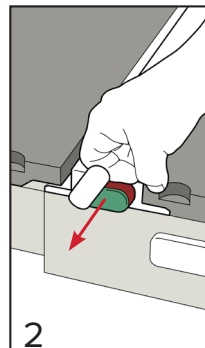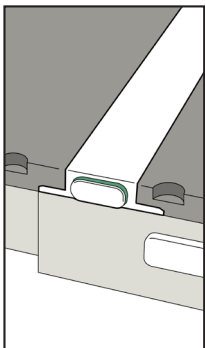

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดอุปกรณ์

สามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ได้โดยใช้ น้ำยาทำความสะอาดหรือ น้ำยาฆ่าเชื้อ อื่นๆ ที่มีฤทธิ์ อ่อนและไม่มี ฤทธิ์ กัดกร่อน ห้ามฉีด หรือเทของเหลวลงบนพื้นผิวของ kVue Calypso เนื่องจากของเหลวดังกล่าวอาจไหลเข้าไปในสลัก OneTouch หรือกลไกภายในฐานเตี้ย ยัง นำผ้าสะอาดไปชุบน้ำยาและเช็ดพื้นผิวเพื่อ ทำความสะอาด

การฆ่าเชื้อ อุปกรณ์

วัสดุทำความสะอาดต่อไปนี้ ได้รับการทดสอบแล้วว่าเหมาะที่จะนำไปใช้ทำความสะอาดพื้นผิวของ kVue Calypso และแผ่นเสริม kVue Calypso หากต้องการฆ่าเชื้อ อื่นๆ บริเวณพื้นผิวของ kVue Calypso โปรดดู คำแนะนำเฉพาะจากผู้ ผลิตสารทำความสะอาด

- น้ำ
- สารละลาย Clorox® Bleach 10%
- ไฮโซฟรพรี แอลกอฮอล์
- สารละลาย Cidex® Activated Dialdehyde 2.4%
- สบู่ และน้ำ

ห้ามฉีดของเหลวลงบน kVue Calypso หรือ แผ่น kVue Calypso โดยตรงหรือ ปล่อยให้ของเหลวไหลลงไปที่ ฐานเตี้ย

ห้ามวางวัตถุมีคมบน kVue Calypso หรือ แผ่นเสริม kVue Calypso

หากมี ของเหลวจากร่างกายไหลเข้าไปในโครงหลัก ให้ถอดสกรู 6 ตัวที่ ยึดแผงด้านหลังออก แล้วทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มี ส่วนประกอบหลักเป็น น้ำยาคีบราสไลด์ หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้ใส่สารหล่อลื่น ให้กับรางสไลด์โดยใช้สารหล่อลื่นแบบพี ลัมแห่งฟลูออโรโพลีเมอร์ (PTFE)

ต้องใส่สารหล่อลื่น ให้กับสลัก OneTouch เป็นระยะ โปรดดู คำแนะนำเกี่ยวกับวิธี ใส่สารหล่อลื่น และทำความสะอาดสลัก OneTouch โดยเฉพาะ

การถอดสลัก OneTouch จะทำให้การรับประกัน kVue Calypso เป็นโมฆะ

คอยตรวจสอบความแน่นของตัวยึดทุกตัวเป็นระยะ

การบำรุงรักษา


ขั้นตอนการทำความสะอาดและการใส่สารหล่อลื่น สำหรับสลัก ONETOUCH

เราขอแนะนำให้ท่านดำเนินการนี้ เป็นประจำทุกเดือน


รายการวัสดุที่ใช้: สารหล่อลื่นแบบพอลิเมอร์ (PTFE), ก้านสำลี และผ้าเช็ดแบบแห้งหรือกระดาษเช็ดมือ

! หมายเหตุ ! รูปภาพด้านล่างแสดงขั้นตอนที่ดำเนินการบน kVue แต่ขั้นตอนนี้จะเหมือนกับขั้นตอนที่ใช้กับ kVue Calypso


1. ถอดแผ่นเสริม kVue Calypso (รูปที่ 1)
2. เช็ดเศษใยผ้าหรือเศษผงออกจากด้านนอกของสลัก (รูปที่ 2)
3. ใช้ก้านสำลีแห้งเช็ดทำความสะอาดด้านในของรูรับ (รูปที่ 3)
4. ฉีดสารหล่อลื่นลงในรูรับ (รูปที่ 4)
5. ใช้ก้านสำลีแห้งเช็ดเศษผ้าและเศษผงออก (รูปที่ 3)
6. ฉีดสารหล่อลื่นลงในรูรับซ้ำอีกครั้ง (รูปที่ 4)
7. ฉีดสารหล่อลื่นลงในช่องว่างระหว่างด้านบนของปุ่มและช่องสำหรับสลักเพื่อหล่อลื่นองค์ประกอบภายใน (รูปที่ 5)
8. ใส่แผ่นเสริม kVue Calypso กลับเข้าที่ และดึงออกด้วยการดึงสลักออกจากด้านตรงข้าม ทำการหล่อลื่นอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่ 7 ซ้ำอีกครั้ง
9. ใส่และถอดแผ่นเสริม kVue Calypso ซ้ำ 3 ถึง 4 รอบ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนในการหล่อลื่นอุปกรณ์ หากแผ่นเสริม kVue Calypso ที่ใส่เข้าไปไม่หลุดออกทั้งหมด
10. เช็ดสารหล่อลื่นส่วนเกินออกจากด้านนอกของสลัก OneTouch

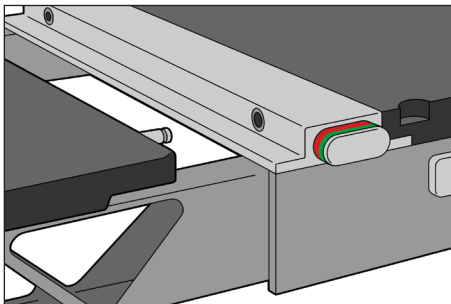


รูปที่ 1

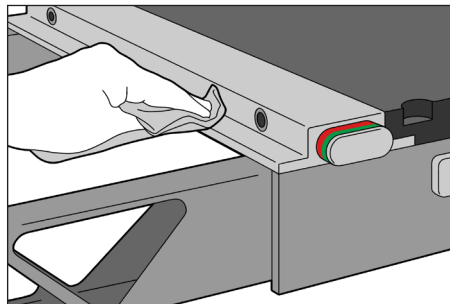


รูปที่ 2

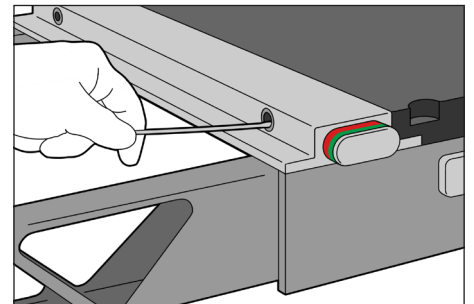

รูปที่ 3

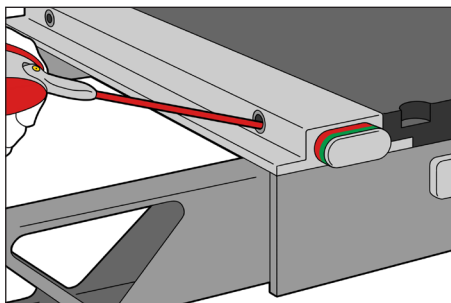


รูปที่ 4

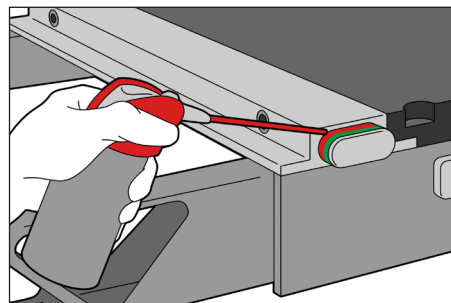

รูปที่ 5

ข้อมูล ลำเพาะ

KVUE พร้อมแผ่นเสริม แบบมาตรฐาน

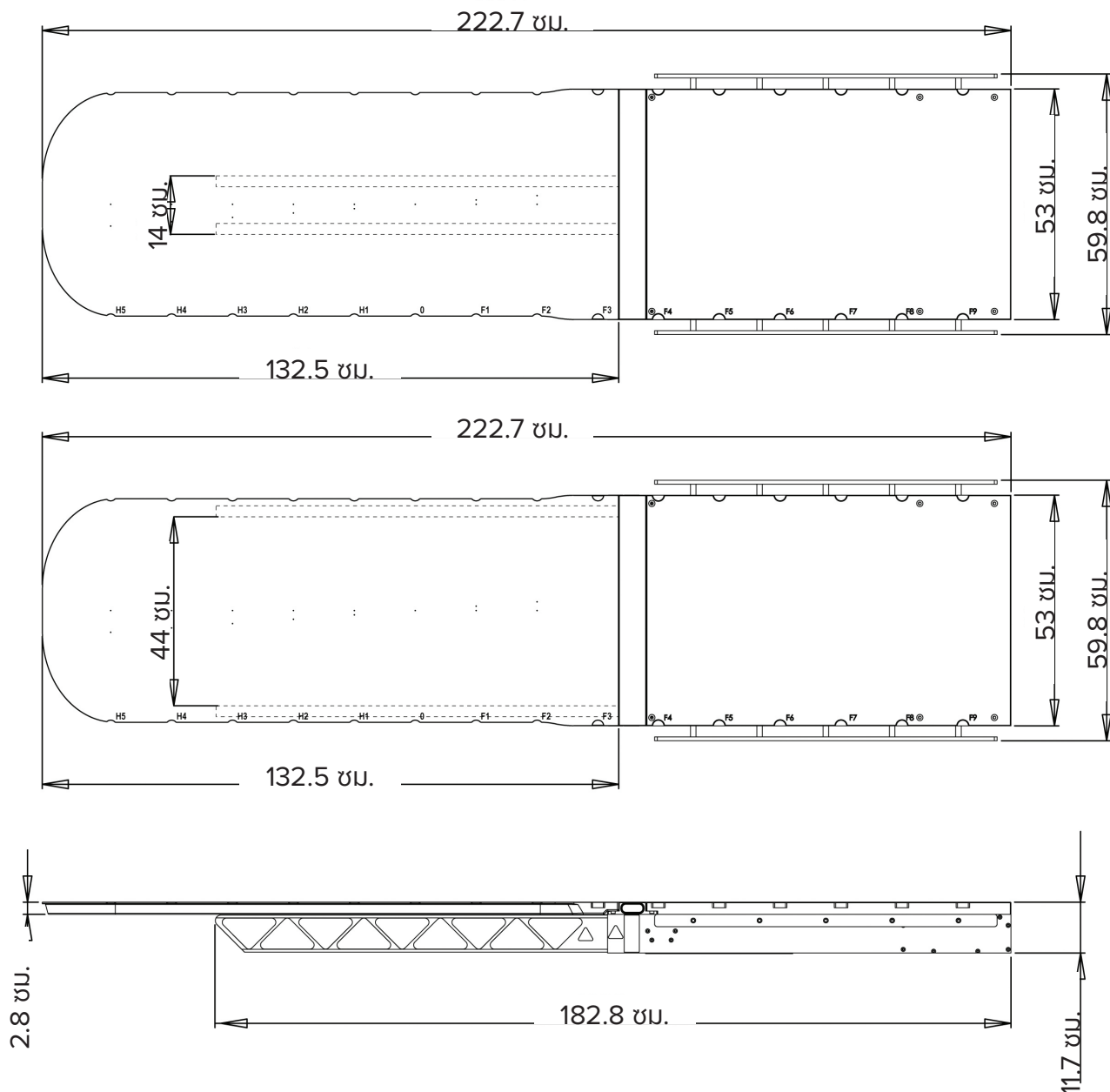

! หมายเหตุ ! โปรดดู ข้อมูล ลำเพาะที่ เก่า ยวข้องกับแผ่นเสริม kVue Calypso แต่ละประเภทได้ที่ คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของแผ่นเสริม kVue Calypso ประเภทนี้ นๆ



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com