



positioning
patients for life.®

PRODUKTVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL

RT-4551KV8

kVue™ Universal Tip Insert





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fremstillet i USA af Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	---	--

kVue og OneTouch er varemærker, der tilhører Qfix.

Exact® er et registreret varemærke, der tilhører Varian Medical Systems.

Clorox® er et registreret varemærke, der tilhører The Clorox Company.

Cidex® er et registreret varemærke, der tilhører Johnson & Johnson.

INDHOLDSFORTEGNELSE

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER	4
ADVARSLER	4
ALVORLIGE HÆNDELSER	4
BELASTNINGSKAPACITET	4
ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER.....	5
TILSIGTET ANVENDELSE	6
BRUGSANVISNING.....	7
MONTERING.....	7
OPSÆTNING	8
AFTAGNING.....	9
VEDLIGEHODELSE.....	10
SPECIFIKATIONER	11
OPSÆTNINGSARK.....	12

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER

ADVARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSTYR. HVIS EN DEL AF UDSTYRET KOMMER UD FOR EN MEGET STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT VÆRE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSTYRET OMGÅENDE INDSTILLES OG QFIX KONTAKTES PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM

! ADVARSEL ! ONETOUCH ER EN PRÆCISIONSMEKANISME OG ER KUN TIL BRUG MED GODKENDT QFIX KVUE-UDSTYR. UDSTYR, DER IKKE ER GODKENDT, IKKE ER FRA QFIX OG IKKE VALIDERET AF QFIX, ER MULIGVIS IKKE SIKKERT TIL BRUG OG VIL UGYLDIGGØRE GARANTIE, HVIS DET ANVENDES.

ALVORLIGE HÆNDELSER

Rapportér alle alvorlige hændelser (f.eks. hændelser, der resulterer i eller har potentiale til at resultere i død eller alvorlig personskaade) til både Qfix og den kompetente myndighed i dit land.

BELASTNINGSKAPACITET

UNDLAD at overskride 249 kg for en jævnt fordelt belastning over universalspidsindsats og bagpanel eller maksimal arbejdsbelastning for legebund, alt efter hvilken der er mindst.

UNDLAD at overskride 38,5 kg ved 25 cm forlængelse fra den forreste kant.

!BEMÆRK! Ved kombination med legebunden fra den originale producent er belastningskapaciteten den laveste af de to tilladte arbejdsbelastninger. Belastningen på kVue Couch Top må IKKE overskride specifikationerne fra producenten af den originale legebund. Se produktliteraturen fra den originale producent.


ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER

ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER

Få en liste over symboler med definitioner på Qfix.com.



ELLER

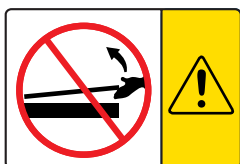


MONTERING OG AFTAGNING AF KVUE INSERT

! LØFT ALDRIG ENDEN AF KVUE INSERT !

De matchende stifter kan blive bøjede eller knække og gøre kVue ubrugelig.

Se monteringsvejledningen til kVue Couch Top vedrørende monterings- og aftagningsanvisninger for kVue.

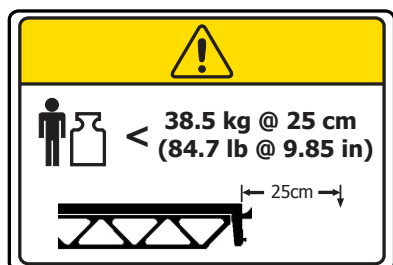

NOMINEL BELASTNING AF SPIDS

Spidsbelastning 38,5 kg over 25 cm

TILSIGTET ANVENDELSE

Denne enhed er beregnet til at immobilisere, placere og flytte patienter, der får strålebehandling.

! BEMÆRK ! Ifølge amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller på en læges anvisning.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter, der gennemgår strålebehandling eller diagnostiske billeddannelsesprocedurer.

TILSIGTEDE BRUGERE

Den tilsigtede bruger til dette produkt er en person, som er kvalificeret i henhold til de lovgivningsmæssige krav i den respektive region.

BRUGSANVISNING

MONTERING

MONTERING AF KVUE


kVue-enheden er designet til at passe til alle større røntgenbehandlingssystemer. Hurtig montering minimerer nedetid for lineær accelerator under montering. Se monteringsvejledningen til kVue Couch Top vedrørende specifikke monteringsoplysninger.

!BEMÆRK! Som nævnt i monteringsvejledningen til kVue Couch Top kan den endelige højde for kVue-overfladen afvige fra højden på det originale system. Se instruktionerne til det originale system for at nulstille systemet (udgangspunkt) inden den indledende brug.

MONTERING AF KVUE INSERT

1. Anbring standardindsatsen oven på støttebjælkerne, og juster de to matchende stifter med modtagerhullerne i OneTouch-låsen.
2. Før standardindsatsen direkte ind i modtagerhullerne fra hovedenden af kVue.

Du vil høre et klik, når standardindsatsen låses på plads. Ved korrekt montering er det KUN den grønne knapflade, der vil være synlig.

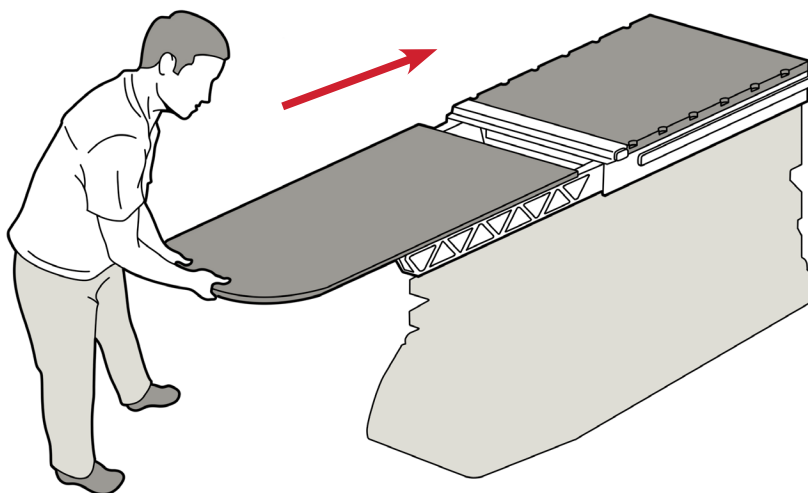


kVue med standardindsats

BRUGSANVISNING

OPSÆTNING


MONTERING AF LOKALISERINGSSTANG

Lokaliseringsstangen er udstyret med to lokaliseringsstifter, der passer til det meste standardmæssige positioneringstilbehør. Fastgør den ved at anbringe hver ende af lokaliseringsstangen i de rette kompatible Varian Exact®-indekshuller, og klik den på plads.

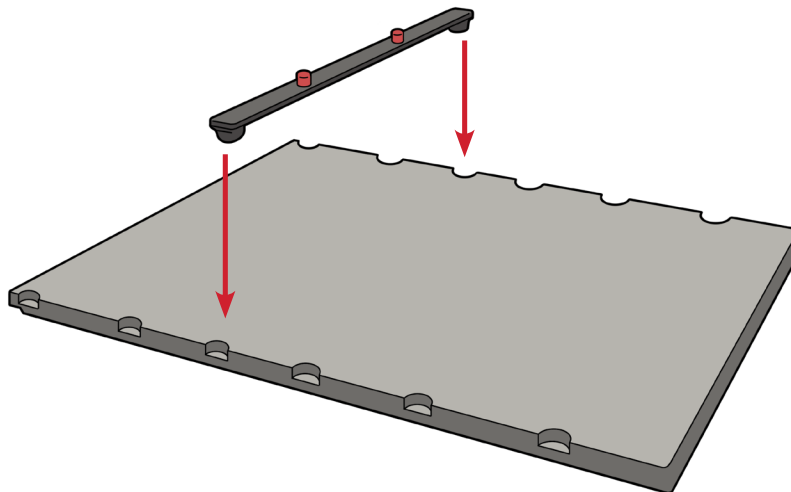

MONTERING AF TILBEHØR

1. Hold det tilbehør, der skal monteres, og stil det skråt i en vinkel på 30 grader til støttebeslaget.
2. Kobl tilbehøret til støttebeslaget, og sænk det, indtil det hviler sikkert på beslaget, og magneterne går i indgreb.

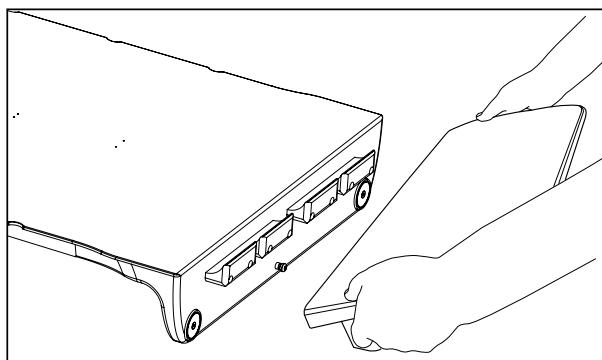

BRUGSANVISNING

AFTAGNING

AFTAGNING AF TILBEHØR

Fjern endepanelet ved at vippe det, indtil det kan løftes af støttebeslagene.




AFTAGNING AF LOKALISERINGSSTANG

Træk op i hver ende af lokaliseringsstangen.

AFTAGNING AF KVUE INSERT

! LØFT ALDRIG ENDEN AF KVUE INSERT ! SELVOM MEKANISMEN ER MEGET ROBUST, KAN DE MATCHENDE STIFTER BØJE ELLER KNÆKKE OG GØRE KVUE UBRUGELIG.

1. Drej grebet mod uret.
2. Træk det roterede greb fra den ene side af kVue, indtil kVue Insert er udløst.
3. Før kVue Insert væk fra kVue.

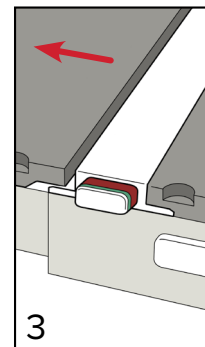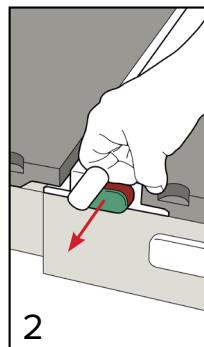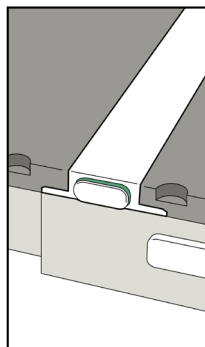

VEDLIGEHOELSE

Udstyret kan rengøres med et mildt, ikke-slibende rengørings- eller desinfektionsmiddel. Undlad at spraye eller hælde væsker på kVue-fladen, da de kan trænge ind i OneTouch Latch eller mekanismerne i legebunden. Rengør udstyret ved at påføre midlet på en ren klud og tørre overfladen af.

Følgende rengøringsmaterialer er blevet testet og fundet at være egnede til rengøring af overfladerne på kVue og lejepladeindsatsen. Se de specifikke anvisninger fra producenten af rengøringsmidlet vedrørende desinfektion af kVue-overfladen.

- Vand
- 10 % Clorox® blegemiddel
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiveret dialdehydmiddel
- Sæbe og vand

SPECIFIKATIONER

LÆNGDE: 950 mm

ALUMINIUMSÆKVIVALENS: ~0,5 mm ved 100 kVp

VANDÆKVIVALENS: 6 mm ved 6 MV

VÆGTGRÆNSE: 38,5 kg over 25 cm forlængelse fra forkanten og 249 kg jævnt fordelt belastning over kVue Insert og bagpanel

OPSÆTNINGSARK

RT-4551KV8 – KVUE™ UNIVERSAL TIP INSERT

Patientens navn:


Patient-ID nr.:

Opsat af:

Læge:

Dato:

Kommentarer:

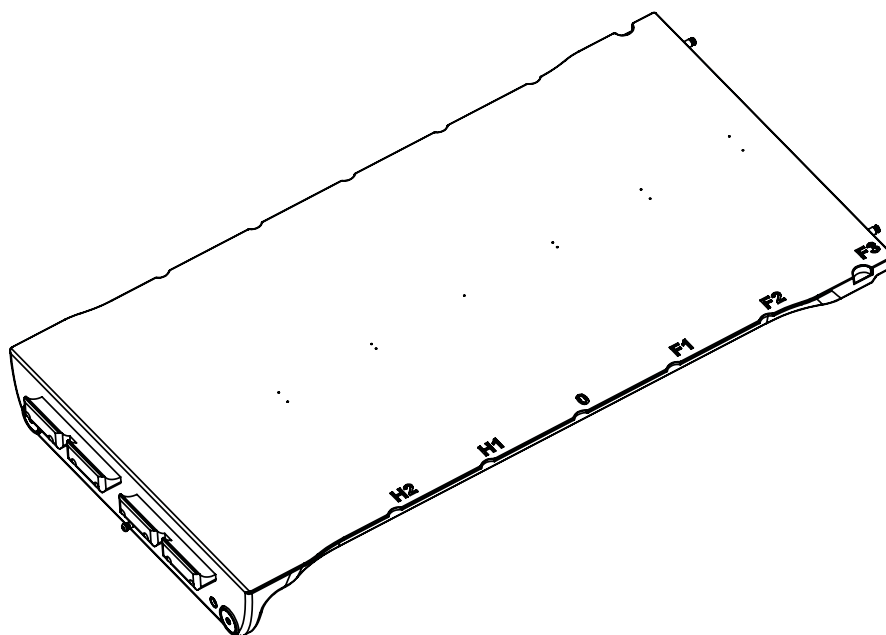

Placering af bevægelig skinne:

Bemærkninger:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2001448_DA_D
2020-06