

PRODUKTVEILEDNING OG BRUKERHÅNDBOK

RT-4551KV8

kVue[™] universell endeinnsats





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Produsert i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

kVue og OneTouch er varemerker som tilhører Qfix.

Exact® er et registrert varemerke som tilhører Varian Medical Systems.

Clorox® er et registrert varemerke som tilhører The Clorox Company.

Cidex® er et registrert varemerke som tilhører Johnson & Johnson.

INNHALDSFORTEGNELSE

GENERELLE FORHOLDSREGLER	4
VARSLER	4
ALVORLIGE HENDELSER	4
BELASTNING	4
VARSELETIKETTER OG BESKRIVELSER	5
BEREGNET BRUK	6
INSTRUKSJONER FOR BRUK	7
INSTALLASJON	7
OPPSETT	8
FJERNING	9
VEDLIKEHOLD	10
SPESIFIKASJONER	11
OPPSETTARK	12

GENERELLE FORHOLDSREGLER

VARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLATT Å FORETA ENDRINGER PÅ DETTE UTSTYRET. HVIS NOEN DEL AV DENNE ENHETEN UTSETTES FOR EKSTREM BELASTNING, VIRKER SKADET ELLER IKKE FUNGERER SOM DEN SKAL, MÅ DU UMIDDELBART SLUTTE Å BRUKE DEN OG KONTAKTE QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! ADVARSEL ! ONETOUCH ER EN PRESISJONSMEKANISME OG SKAL KUN BRUKES MED GODKJENTE QFIX KVUE-ENHETER. IKKE-GODKJENTE ENHETER FRA ANDRE ENN QFIX SOM IKKE ER VALIDERT AV QFIX, ER IKKE NØDVENDIGVIS SIKRE I BRUK, OG BRUK AV SLIKE ENHETER VIL FØRE TIL AT GARANTIE BLIR UGYLDIG.

ALVORLIGE HENDELSER

Rapporter alle alvorlige hendelser (f.eks. hendelser som fører til, eller kan føre til død eller alvorlig skade) til både Qfix og den relevante myndigheten i landet.

BELASTNING

IKKE overskrid 249 kg (550 lb) jevnt fordelt belastning på universell endeinnsats og bakpanel eller maksimal arbeidsbelastning for bordunderstellet, avhengig av hvilken som er lavest.

IKKE overskrid 38,5 kg (85 lb) ved 25 cm fra fremre kant.

! MERK ! Når bordtoppen er kombinert med originalutstyrets bordunderstell, er belastningen den laveste av de to sikre arbeidsbelastningene. Belastningen på kVue-bordtoppen skal IKKE overskride spesifikasjonene til produsenten av det originale bordunderstellet. Se produktdokumentasjonen fra produsenten av originalutstyret.

GENERELLE FORHOLDSREGLER

VARSELETIKETTER OG BESKRIVELSER

Se Qfix.com for en liste over symboler og deres definisjoner.



ELLER




INSTALLASJON OG FJERNING AV KVUE-INNSATS

! LØFT ALDRI OPP ENDEN AV KVUE-INNSATSEN !

Koblingsboltene kan bøyes eller ryke, slik at kVue blir ubrukelig.

Se installasjonshåndboken for kVue-bordtoppen for instruksjoner om installasjon og fjerning.

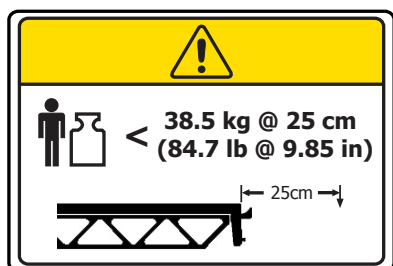

BELASTNING PÅ ENDEINNSATS

Angitt belastning på endeinnsats er 38,5 kg ved 25 cm (84,7 lb ved 9,85 tommer).

BEREGNET BRUK

Denne enheten er beregnet på immobilisering, posisjonering og reposisjonering av pasienter som gjennomgår strålebehandling.

! MERK ! Amerikansk lov krever at dette utstyret kun selges av eller etter fullmakt fra lege.

PASIENTMÅLGRUPPER

Pasienter som gjennomgår strålebehandling eller prosedyrer med diagnostisk avbildning.

TILTENKTE BRUKERE

Tiltente brukere for produktene er personer som er kvalifisert i henhold til kravene i lokale forskrifter.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

INSTALLASJON

INSTALLASJON AV KVUE


kVue er utformet for å passe til de mest brukte strålebehandlingssystemene. Rask installasjon minimerer lineærakseleratorens nedetid under installasjon. Se installasjonshåndboken for kVue-bordtoppen for detaljert informasjon om installasjon.

! MERK ! Som beskrevet i installasjonshåndboken for kVue-bordtoppen kan den endelige høyden på kVue-overflaten avvike fra originalsystemet. Se originalsystemets instruksjoner for å tilbakestille systemets nullpunkt (origo) før bruk.

INSTALLASJON AV KVUE-INNSATS

1. Plasser standardinnsatsen oppå støttebjelkene og juster de to koblingsboltene i forhold til mottakshullene i OneTouch-låsen.
2. Skyv standardinnsatsen rett inn i mottakshullene fra hodeenden på kVue.

Du vil høre et klikk når standardinnsatsen låses på plass. KUN den grønne knappeflaten vil være synlig når innsatsen er riktig installert.

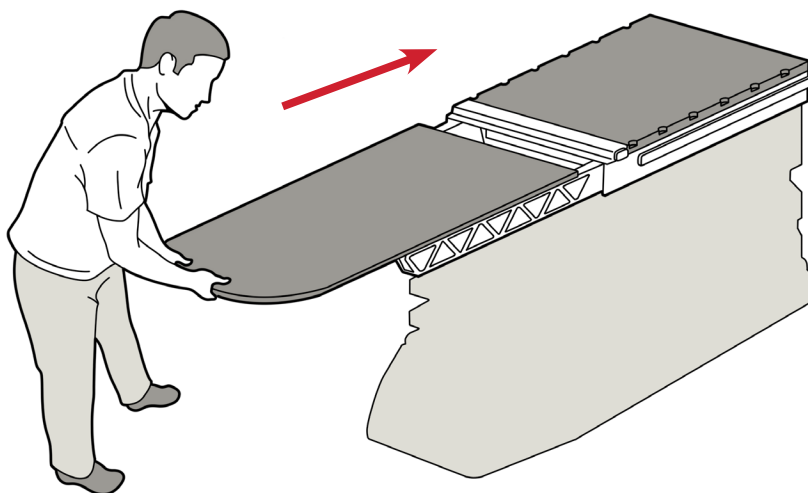


kVue med standardinnsats

INSTRUKSJONER FOR BRUK

OPPSETT


INSTALLASJON AV PLASSERINGSSTANG

Plasseringsstangen har to plasseringsbolter som kan brukes med de fleste standard posisjoneringstilbehør. Fest plasseringsstangen ved å plassere begge endene i de relevante Varian Exact®-kompatible indekssporene og låse dem på plass.

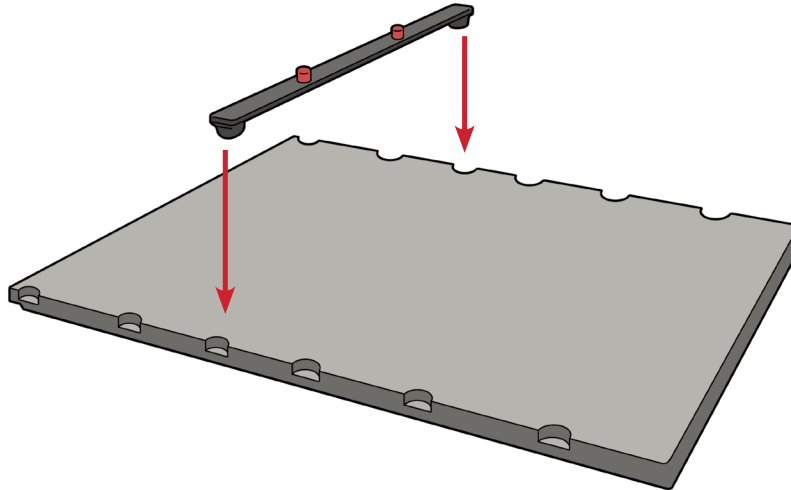

INSTALLASJON AV TILBEHØR

1. Hold tilbehøret som skal installeres i en 30 graders vinkel i forhold til støttebrakettene.
2. Sett tilbehøret inn i støttebraketten og senk det til det hviler trygt på brakettene og magnetene kobles inn.

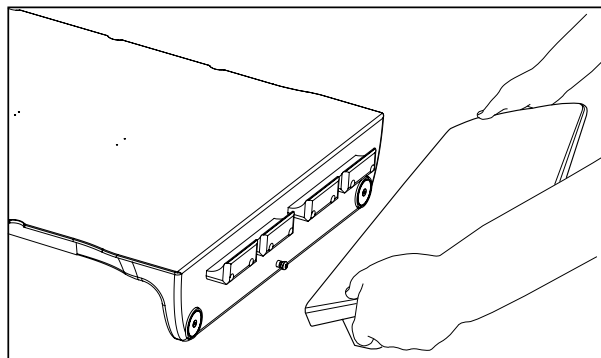

INSTRUKSJONER FOR BRUK

FJERNING

FJERNING AV TILBEHØR

Fjern endepanelet ved å vippe det opp til du kan løfte det av støttebrakettene.




FJERNING AV PLASSERINGSSTANG

Dra opp begge endene av plasseringsstangen.

FJERNING AV KVUE-INNSATS

! LØFT ALDRI OPP ENDEN AV KVUE-INNSATSEN ! SELV OM MEKANISMEN ER SVÆRT ROBUST, KAN KOBLINGSBOLTENE BØYES ELLER RYKE, SLIK AT KVUE BLIR UBRUKELIG.

1. Vri spaken mot klokka.
2. Skyv spaken ut fra siden av kVue-bordtoppen til kVue-innsatsen frigjøres.
3. Skyv kVue-innsatsen bort fra kVue-bordtoppen.

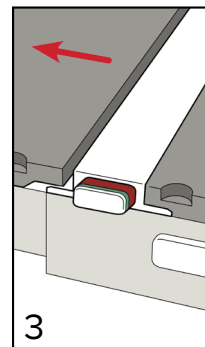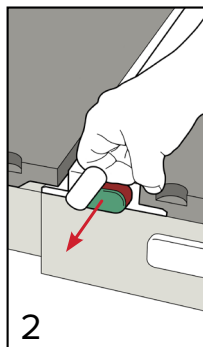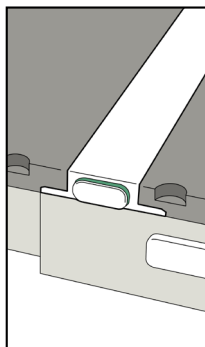

VEDLIKEHOLD

Enhetene kan rengjøres med en mild, ikke-slipende rengjørings- eller desinfeksjonsløsning. Ikke spray eller hell væske på enhetene, ettersom væsken kan renne ned i OneTouch-låsen eller mekanismer på innsiden av bordunderstellet. Rengjør ved å påføre løsningen på en ren klut og tørke av overflaten.

Følgende rengjøringsmidler er testet og funnet egnet for rengjøring av enhetenes overflate. Se spesifikke instruksjoner fra produsenten av rengjøringsmiddelet for å desinfisere overflaten.

- Vann
- En 10 % Clorox®-løsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktivert dialdehydløsning
- Såpe og vann

SPESIFIKASJONER

LENGDE: 950 mm

ALUMINIUMEKVIVALENS: ~0,5 mm ved 100 kVp

VANNEKVIVALENS: 6 mm ved 6 MV

VEKTGRENSE: 38,5 kg (85 lb) ved 25 cm fra fremre kant, og 249 kg (550 lb) jevnt fordelt belastning på kVue-innsats og bakpanel

OPPSETTARK

RT-4551KV8 – KVUE™ UNIVERSELL ENDEINNSATS

Navn på pasient:


Pasient-ID:

Satt opp av:

Lege:

Dato:

Kommentarer:

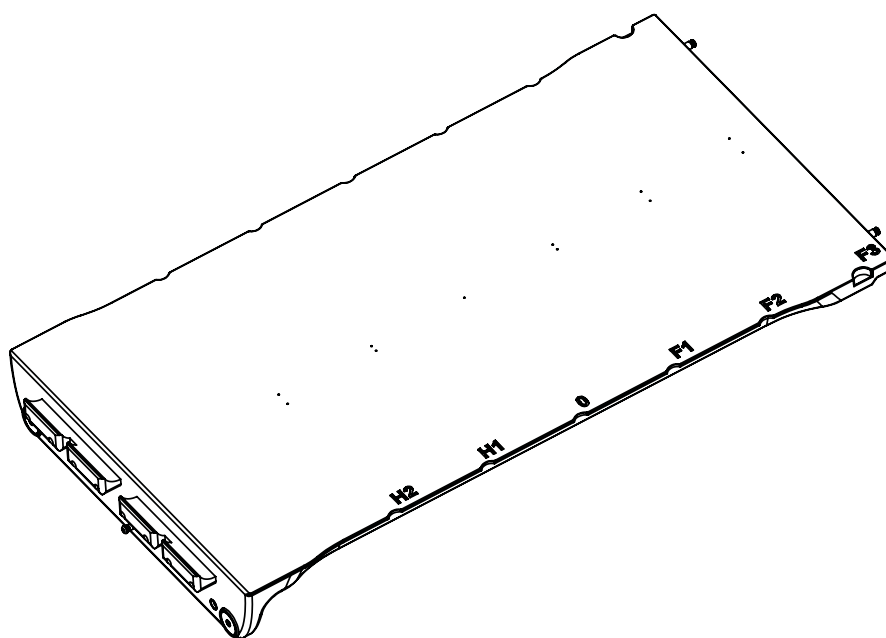

Plassering av flyttbar skinne:

Merknader:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com