


ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4551KV5 VE RT-4551KV18

kVue™ Couch Top için

kVue™ DoseMax™ Insert

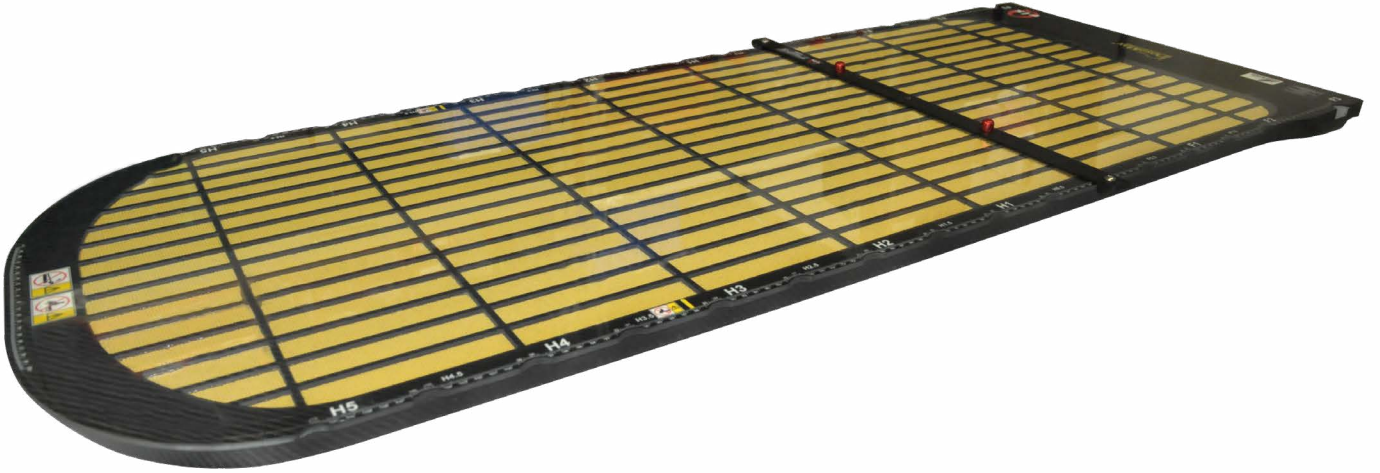



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 A.B.D.'de üreten Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com
----	-----	---	--

kVue, DoseMax ve OneTouch, Qfix şirketinin ticari markalarıdır.

Exact®, Varian Medical Systems şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Clorox®, The Clorox Company'nin tescilli ticari markasıdır.

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

İÇİNDEKİLER

GENEL ÖNLEMLER	4
UYARI İFADELERİ	4
CİDDİ OLAYLAR.....	4
YÜK ANMA DEĞERİ.....	4
UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI	5
KULLANIM AMACI.....	6
ÇALIŞTIRMA TALİMATI	7
MONTAJ	7
KURULUM	8
ÇIKARMA.....	9
BAKIM.....	10
SİSTEMİN TEMİZLENMESİ	10
SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ	10
DOSEMAX MYLAR FİLMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ.....	10
SPESİFİKASYONLAR	11
PARÇA LİSTESİ.....	12
KURULUM SAYFASI	13
RT-4551KV5 VE RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT	13

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKIPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6053 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

! UYARI ! ONETOUCH HASSAS BİR MEKANİZMA OLUP, SADECE ONAYLANMIŞ QFIX KVUE CİHAZLARIYLA BERABER KULLANILMAK İÇİNDİR. QFIX TARAFINDAN DOĞRULANMAMIŞ OLAN QFIX DIŞI ONAYLANMAMIŞ CİHAZLARIN KULLANIMI GÜVENLİ OLMAYABİLİR VE KULLANILDIKLARI TAKDİRDE GARANTİYİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.

CIDDI OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.

YÜK ANMA DEĞERİ


249 kg'lık eşit dağılımlı yükü veya yatak tabanının azami çalışma yükünü (hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.

! NOT ! Orijinal donanım üreticisinin yatak tabanı ile birleştirildiğinde yük anma değeri, iki güvenli çalışma yükü arasında daha düşük olanıdır. kVue Couch Top üzerindeki yük, orijinal yatak tabanı üreticisinin spesifikasyonlarını AŞMAMALIDIR. Lütfen orijinal üretici tarafından temin edilen ürün bilgilerine başvurun.


GENEL ÖNLEMLER

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.

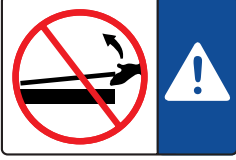

VEYA

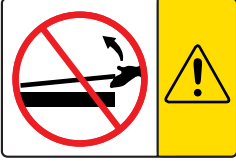

KVUE INSERT'İN MONTAJI VE SÖKÜLMESİ

! UYARI ! ASLA KVUE INSERT'İ UCUNDAN KALDIRMAYIN !

Birleştirme pimleri eğilerek veya kırılarak kVue cihazını kullanılmaz hale getirebilir.

kVue montaj ve sökme talimatı için kVue Couch Top Montaj El Kitabına başvurun.

↓ NO STEP ↓

VEYA



“NO STEP (SINIR)” ÇİZGİSİ (VARSA)

kVue Insert üzerindeki sarı çizgi, destek kirişlerinin sonunu temsil eder. Çizginin ötesindeki alan, hasta gövdesinin üst kısmını veya vücudunun alt kısmını destekleyecek şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir (yük anma değerini aşmıyorsa).

kVue Insert üzerinde “No Step (Sınır)” çizgisinden daha ileride ayakta durmak veya oturmak kVue Insert'e hasar verebilir veya yaralanmaya neden olabilir.

KULLANIM AMACI

Bu cihazın kullanım amacı, radyasyon tedavisi olan hastaları hareketsizleştirmek, konumlandırmak ve yeniden konumlandırmaktır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya onların siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI

Radyasyon tedavisi ya da diyagnostik görüntüleme prosedürleri uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

MONTAJ

KVUE MONTAJI


kVue, bütün belli başlı radyoterapi tedavi sistemlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemin hızlı montajı, doğrusal hızlandırıcının çalışmama süresini asgariye indirir. Özel montaj bilgileri için kVue Couch Top Montaj El Kitabına başvurun.

! NOT ! kVue Couch Top Montaj El Kitabında detaylı olarak belirtildiği gibi, kVue yüzeyinin son yüksekliği orijinal sistemden farklı olabilir. İlk kullanımdan önce sistemin sıfır noktasını yeniden kurmak için orijinal sistem talimatına başvurun.

KVUE INSERT'İN MONTAJI

1. Standard Insert'i destek kirişlerinin üstüne yerleştirin ve iki birleştirme pimini OneTouch Latch içinde bunlara karşılık gelen deliklerle hizalayın.
2. kVue'nun baş tarafından, Standard Insert'i karşılık gelen delikler içine doğrudan kaydırın.

Standard Insert yerine kilitlendiğinde bir tık sesi duyacaksınız. Doğru montaj yapıldığında SADECE yeşil düğme yüzeyi görünür olacaktır.

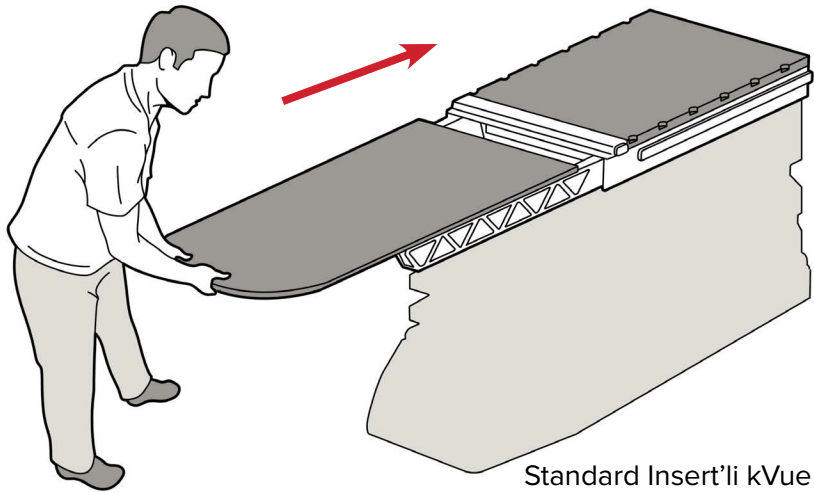


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM

YERLEŞTİRME ÇUBUĞUNUN MONTAJI

Yerleştirme Çubuğu, çoğu standart konumlandırma aksesuarlarına uyan iki yerleştirme pimi içerir. Takmak için, Yerleştirme Çubuğunun uçlarından birini Varian Exact® ile uyumlu uygun indeks dişlerine yerleştirip yerine oturtun.

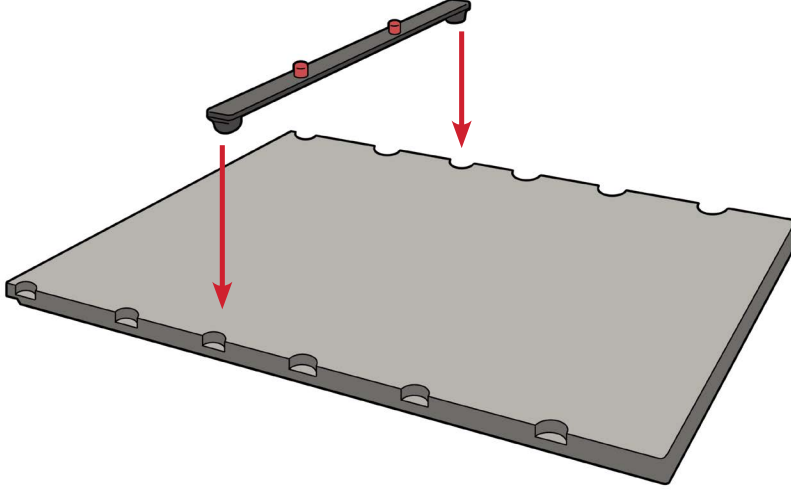

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

ÇIKARMA




YERLEŞTİRME ÇUBUĞUNUN ÇIKARILMASI

Yerleştirme Çubuğunun herhangi bir ucundan yukarı kaldırın.

KVUE INSERT'İN ÇIKARILMASI

! UYARI ! ASLA KVUE INSERT'İ UCUNDAN KALDIRMAYIN ! MEKANİZMA SAĞLAM OLMASINA RAĞMEN BİRLEŞTİRME PİMLERİ EĞİLEREK VEYA KIRILARAK KVUE CİHAZINI KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİR.

1. Kolu saatin ters yönünde döndürün.
2. kVue Insert serbest kalana kadar, döndürülmüş Kolu kVue'nun bir tarafından çekin.
3. kVue Insert'i kVue'dan öteye doğru kaydırın.

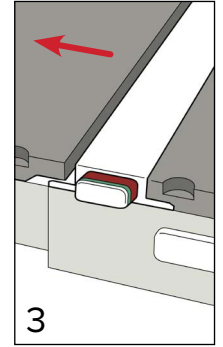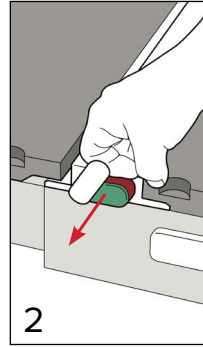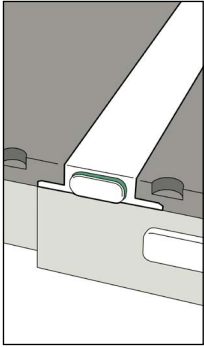

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz hafif, aşındırıcı olmayan temizlik ya da dezenfeksiyon solüsyonu ile temizlenebilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin. Cihazı görsel olarak inceleyin, eğer temiz değilse temiz görünüme kadar önceki temizleme adımlarını tekrarlayın. Herhangi bir temizlik maddesi kalıntısını gidermek üzere cihazı silmek için suyla nemlendirilmiş temiz bir bez kullanın. Kurulamak için cihazı temiz, kuru bir bezle silin. Aşağıdaki temizlik malzemeleri test edilmiş ve cihazın temizlenmesi için uygun bulunmuştur.

- Su
- Sabunlu su

SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ

Cihaz yüzeyinin dezenfekte edilmesi için temizlik maddesi üreticisinin özel talimatlarına başvurun.


- %10 Clorox® marka çamaşır suyu solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® marka %2,4 Aktive Dialdehid Solüsyonu

kVue yüzeyine sıvı SPREYLEMEYİN veya dökmeyin; aksi takdirde sıvı OneTouch Latch veya yatak tabanı dahilindeki mekanizmaların içine akabilir.


Doğrudan DoseMax üzerine SPREYLEMEYİN veya yatak tabanı içine akmasına izin VERMEYİN.

DOSEMAX MYLAR FİLMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Mevcut filmi bir kenardan soyun.
2. Yüzeydeki tüm yapıştırıcı kalıntılarını bir yapıştırıcı giderme maddesiyle temizleyip yüzeyi hazırlayın.
3. Üst logoyu kaplamaya dikkat ederek yeni filmi hizalayın (Şekil 1). Her kenar, cihazın dış kenarından yaklaşık 7,24 mm mesafede olmalıdır.
4. Filmi DoseMax'ın yüzeyine tutturmak için kenarında birkaç noktaya maskeleme bandı yerleştirin (Şekil 2).
5. Filmin superior yarısındaki maskeleme bantlarını çıkarın. Filmin arkasındaki yapıştırıcı destek tabakasını soyun. Filmi sağlamca cihaz yüzeyine uygulayın.
6. Filmin anterior yarısındaki maskeleme bantlarını çıkarın ve arkasındaki yapıştırıcı destek tabakasını soyun. Filmi sağlamca cihaz yüzeyine uygulayın.
7. Filmin koruyucu kaplamasını soyun.

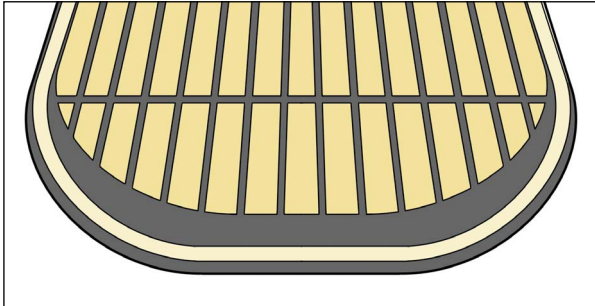

Şekil 1

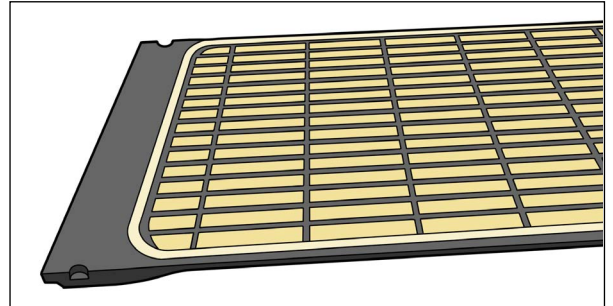

Şekil 2

SPESİFİKASYONLAR

UZUNLUK: 1325 mm

SU EŞDEĞERLİĞİ: 6 MV'de 2,0 mm

AĞIRLIK SINIRI: 249 kg Eşit Dağılımlı Yük

PARA LİSTESİ

RT-4551KV5F – DoseMax için Yedek Film Tabakası (3'lü Paket)

KURULUM SAYFASI

RT-4551KV5 VE RT-4551KV18 – KVUE DOSEMAX INSERT

Hastanın Adı Soyadı:


Hasta Tanılayıcı No.:

Hekim:

Yorumlar:

Kurulumu Yapan:

Tarih:

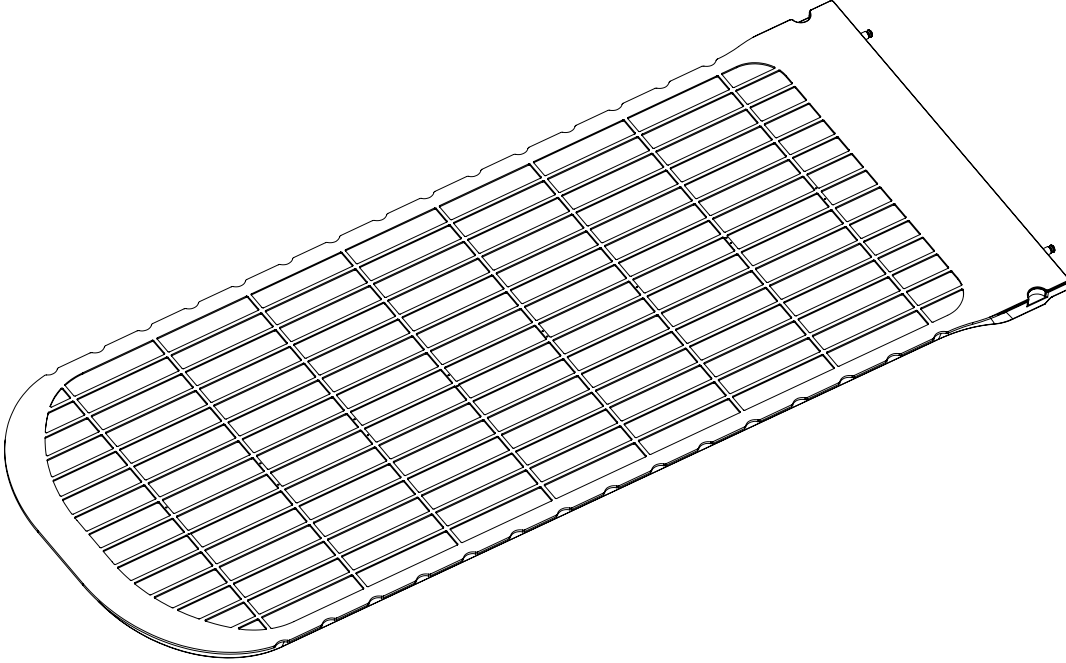

Hareketli Ray Yeri:

Notlar:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

📠 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2001449_TR_E
2021-07