

安装手册

RT-4551KVPP

适用于 Varian Exact®/Truebeam™ 治疗床 底座的 kVue™ 挤夹点盖板



！警告！在 VARIAN EXACT®/TRUEBEAM™ 治疗床底座上安装 KVUE 时，必须安装 KVUE 挤夹点盖板。*

***包括但不限于所有配备 Exact® 或 TrueBeam™ 治疗床底座的 Varian® 线性加速器。包括低能和高能 C 系列 Clinacs®、Acuity™ 和 Ximatron® 产品线。**

！注意！应在安装 kVue 床顶之前安装 kVue 盖板。

警告声明

！警告！不得修改本设备。如本装置的任何部分承受过大载荷、出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用并通过 +1 484-720-6054 或 TECHSUPPORT@QFIX.COM 联系 QFIX。



Advena Limited
Tower Business Centre, 2nd Flr
Tower Street, Swatar, BKR 4013
Malta



美国制造，制造商为
科辅适 Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, 美国
+1 610-268-0585 www.Qfix.com

产品名称：人体定位袋

医疗器械备案号：20150038

kVue 是 Qfix 的商标。

Varian®, Exact®, Clinacs®, Acuity® 和 Ximatron® 是 Varian Medical Systems 的注册商标。
TrueBeam™ 是 Varian Medical Systems 的商标。

安装

1. 在施用 kVue 挤夹点盖板之前, 用异丙醇擦拭床顶的下侧, 并用无绒布块擦干。在施用 kVue 挤夹点盖板之前, 确保表面干燥。
 2. 从 kVue 挤夹点盖板上取下粘合底布。(图 1)
 3. 将盖板与 kVue 床顶的底部对齐并施用。(图 2。)
- ！注意！确保盖板沿边缘正确对齐。如有任何塑料悬垂, 请在继续执行步骤 4 之前将其修剪掉。**
4. 在图 3 所示位置施用两点“小心”标签。在另一侧重复此步骤, 施用剩余的两个标签。
 - a. 从贴面上取下粘合底布以便施用。
 - b. 当施用贴面时, 虚线应与床顶的底边共线, 然后折叠以粘附到盖板的底部, 如图 4 所示。
 5. 请参阅 kVue 安装手册, 以将 kVue 床顶安装到治疗床底座上。

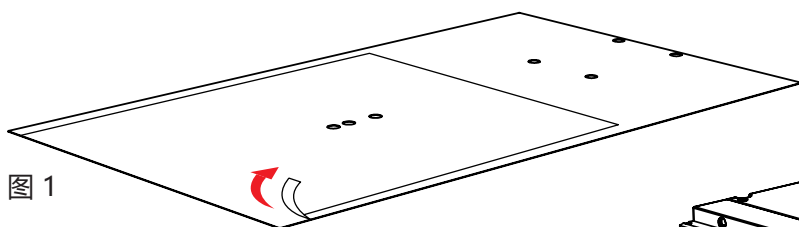


图 1

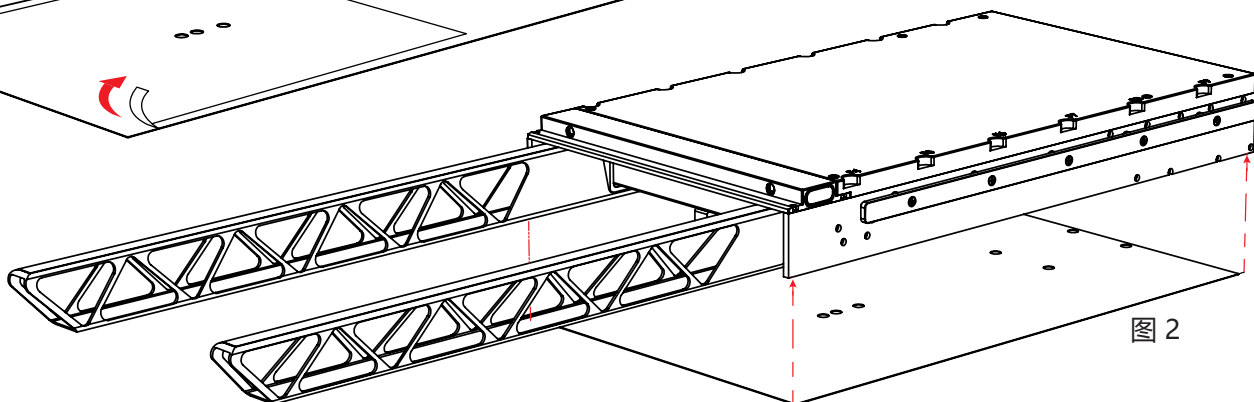


图 2


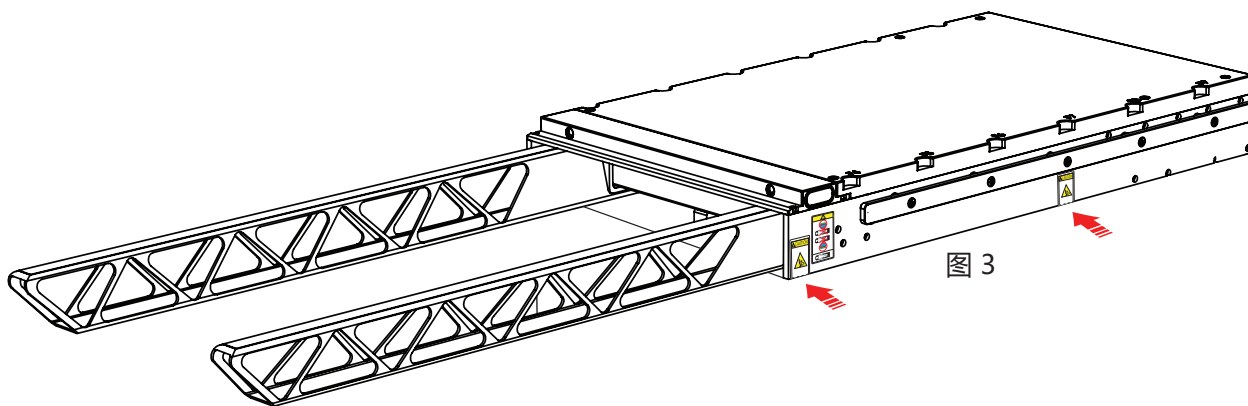


图 3

图 4

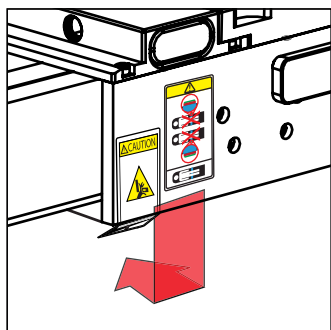

440 Church Road
Avondale, PA 19311 美国
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com 2001825_ZH_A