

IZSTRĀDĀJUMA CELVEDIS, UN LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

RT-4525HGA

Roktura bloks



 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Cidex® ir Johnson & Johnson reģistrēta preču zīme.
Clorox® ir The Clorox Company reģistrēta preču zīme.

VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMU PAZIŅOJUMI

! BRĪDINĀJUMS ! NAV PIEĻAUJAMA NEKĀDA VEIDA APRĪKOJUMA PĀRVEIDOŠANA. JA JEBKURA ŠIS IERĪCES DAĻA IR TIKUSI KĀTASTROFĀLI PĀRSLOGOTA, IZSKATĀS BOJĀTA VAI DARBOJAS NEPAREIZI, NEKĀVĒJOTIES PĀRTRAUCIET TĀS LIETOŠANU UN SAZINIETIES AR UZNĒMUMU CQ MEDICAL PA TĀLRUNI +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 VAI E-PASTĀ SUPPORT@CQMEDICAL.COM.


! UZMANĪBU ! NESĒDIET UZ ROKTURA BLOKA, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ ROKTURA BLOKS VAR SALŪZT, IZRAISOT PACIENTA TRAUMAS.

NOPIETNI NEGADĪJUMI

Par nopietniem negadījumiem (piem., negadījumiem, kas izraisījuši vai iespējami varēja izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu), lūdzu, ziņojiet gan uzņēmumam CQ Medical, gan savas valsts atbildīgajai varas iestādei.

BRĪDINĀJUMA MARKĒJUMI UN APRAKSTI


Simbolu un to skaidrojumu sarakstu skatiet vietnē CQmedical.com.

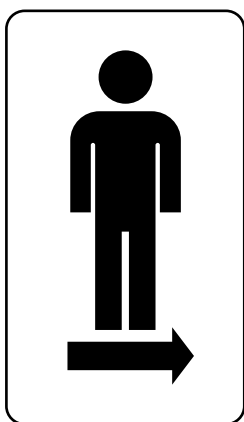

PACIENTA KREISĀ PUSE

Attiecas uz pacienta kreiso pusi, un tā ir puse, kurā šis konkrētais adapteris ir jāuzstāda.*

**Šo adapteri mazāka auguma pacientu terapijas laikā var uzstādīt pretējā pusē.*

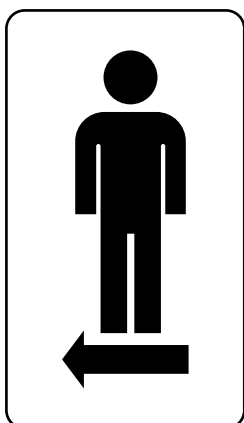

PACIENTA LABĀ PUSE

Attiecas uz pacienta labo pusi, un tā ir puse, kurā šis konkrētais adapteris ir jāuzstāda.*

**Šo adapteri mazāka auguma pacientu terapijas laikā var uzstādīt pretējā pusē.*

VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMA MARKĒJUMI UN APRAKSTI



NESEĎDIET

Stāvēšana vai sēdēšana uz roktura bloka var sabojāt roktura bloku vai izraisīt traumas.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Šī ierīce ir paredzēta, lai imobilizētu, pozicionētu un pārpozicionētu pacientus, kuriem tiek veikta staru terapija.

! PIEZĪME ! Amerikas Savienoto Valstu Federālā likumdošana ierobežo šīs ierīces pārdošanu tikai pēc ārsta norādījuma.

Pacientu mērķgrupas

Pacienti, kuriem tiek veikta staru terapija vai diagnostikas attēlveidošanas procedūras.

Paredzētie lietotāji


Šo izstrādājumu paredzētais lietotājs ir persona, kura ir atbilstoši kvalificēta saskaņā ar reģiona noteikumos minētajām prasībām.

FUNKCIJAS

APRAKSTS

Roktura bloks nodrošina uzticamu indeksētu pacienta roku pozīciju. Šī izvēles ierīce palīdz nodrošināt precīzu pacienta novietojumu no simulācijas līdz terapijai.

KOMPONENTI

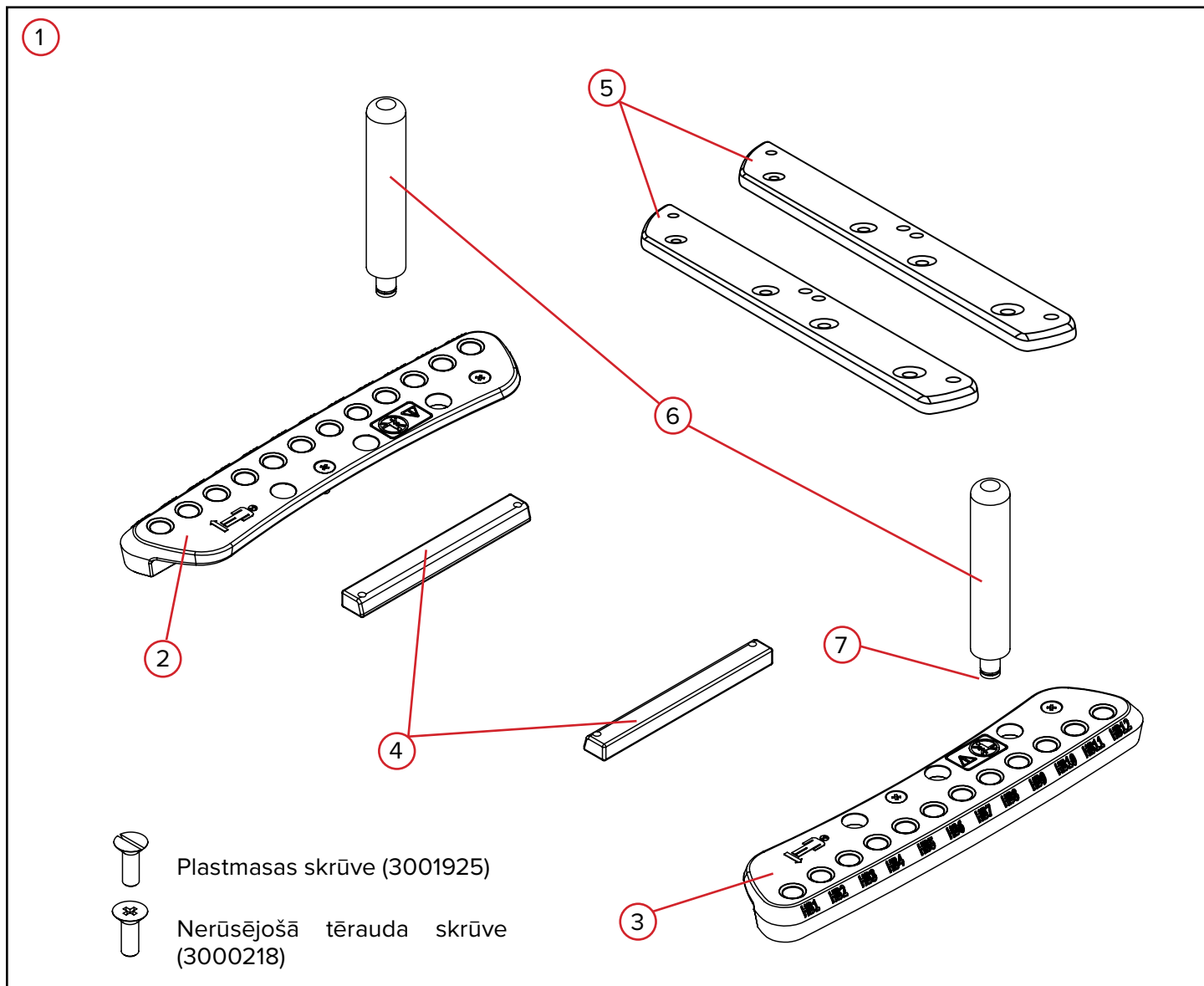

FUNKCIJAS

KOMPONENTI

1. ROKTURA BLOKS

Roktura bloks nodrošina uzticamu indeksētu pacienta roku pozīciju. Šī izvēles ierīce palīdz nodrošināt precīzu pacienta novietojumu no simulācijas līdz terapijai.

2. ROKTURA BLOKS — PACIENTA LABĀ PUSE

Roktura bloks — pacienta labā puse ir roktura bloks, kas atrodas pacienta labajā pusē, un tas ir grafiski atzīmēts uz ierīces. Lietojot mazāka auguma pacientiem, tas tiek apgriezts pretējā virzienā.

3. ROKTURA BLOKS — PACIENTA KREISĀ PUSE

Roktura bloks — pacienta kreisā puse ir roktura bloks, kas atrodas pacienta kreisajā pusē, un tas ir grafiski atzīmēts uz ierīces. Lietojot mazāka auguma pacientiem, tas tiek apgriezts pretējā virzienā.

4. kVue IELIKTŅA ADAPTERIS

kVue ieliktna adapteri tiek izmantoti tikai tad, ja pievienojat roktura bloku kVue ieliktniem, kuriem ir iepriekš izurbtas atveres, lai ievietotu roktura bloku.

5. kVue Portrait IELIKTŅA ADAPTERIS

kVue Portrait ieliktna adapteri tiek izmantoti tikai tad, ja pievienojat roktura bloku kVue Portrait ieliktniem, kuriem ir iepriekš izurbtas atveres, lai ievietotu roktura bloku.

6. ROKTURI

Rokturi tiek indeksēti attiecībā pret roktura bloku vienā no 12 atrašanās vietām.

7. BLĪVGREDZENS

Blīvgredzens tiek piestiprināts katra roktura apakšai, lai palīdzētu noturēt rokturi indeksācijas vietās.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

UZSTĀDĪŠANA

ROKTURA BLOKA UZSTĀDĪŠANA

! PIEZĪME ! Attiecībā uz uzstādīšanu vecākām versijām sazinieties ar CQ Medical pa tālruni +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688.

1. Novietojiet roktura bloku uz ierīces, izlīdzinot to ar atbilstošajām atverēm, kas parādītas 1. att.

! PIEZĪME ! Kurā pusē ir jāuzstāda katrs roktura bloks, skatiet vispārējo piesardzības pasākumu sadaļu.

! PIEZĪME ! Lielākajai daļai ierīču roktura bloks tiks uzstādīts 1. un 3. atverē no ierīces galvas, kā parādīts 2. att., ja vien šajā vietā jau nav uzstādīts adapteris. Šādā gadījumā salāgojiet roktura bloku ar nākamajām pieejamām atverēm.

! PIEZĪME ! Ja roktura bloks tiek uzstādīts uz kVue ieliktna, skatiet “Uzstādīšana kVue ieliktniem”.

! PIEZĪME ! Ja roktura bloks tiek uzstādīts mazāka auguma pacientiem, skatiet sadaļu “Mazāka auguma pacienti”.




1. att.



2. att.

2. Ar skrūvgriezi pievelciet skrūves (3000218) atbilstošajās atverēs, skrūvējot pulksteņrādītāju kustības virzienā, kā parādīts 3. att. (Lai atlaistu vajīgāk, grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam).

! BRĪDINĀJUMS ! JA JŪSU IERĪCE IR MARKĒTA KĀ MR SAFE (DROŠS MR VIDĒ), IZMANTOJIET KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀS PLASTMASAS SKRŪVES (3001925).

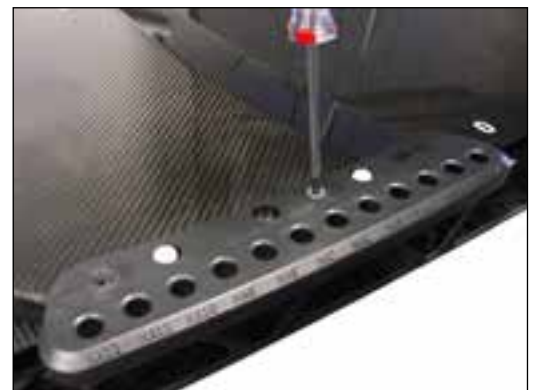

3. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

UZSTĀDĪŠANA


UZSTĀDĪŠANA kVue IELIKTŅIEM

Izmantojiet to pašu metodi, lai uzstādītu roktura bloku uz kVue ieliktņa tāpat kā jebkuru citu ierīci (kā parādīts iepriekš). Vienīgais izņēmums ir tāds, ka skrūve netiek pievilkta tieši ierīcē, bet gan ieskrūvēta ieliktņa adapterī (4. un 5. att.).

! PIEZĪME ! Roktura bloks var nedarboties ar visiem adapteriem.



4. att.

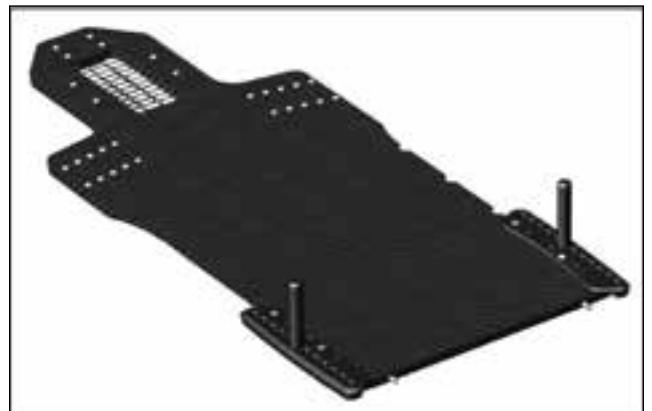

5. att.

UZSTĀDĪŠANA MAZĀKA AUGUMA PACIENTIEM

Kreisās un labās puses roktura bloku var apgriezt otrādi, lai iestatītu mazāka auguma pacientiem, kā parādīts 6. att.



6. att.


LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

UZSTĀDĪŠANA


UZSTĀDĪŠANA kVue PORTRAIT IELIKTŅIEM

1. Izmantojot divas (2) $\frac{1}{4}$ -20 x 1" komplektā iekļautās skrūves, piestipriniet adapteri pie kVue. Atkārtojiet šīs darbības otrā pusē (7. att.).
2. Piestipriniet roktura bloku katrā pusē, izmantojot divas (2) $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{4}$ " plakangalvas skrūves (8. att.).

! PIEZĪME ! Roktura bloks var nedarboties ar visiem adapteriem.

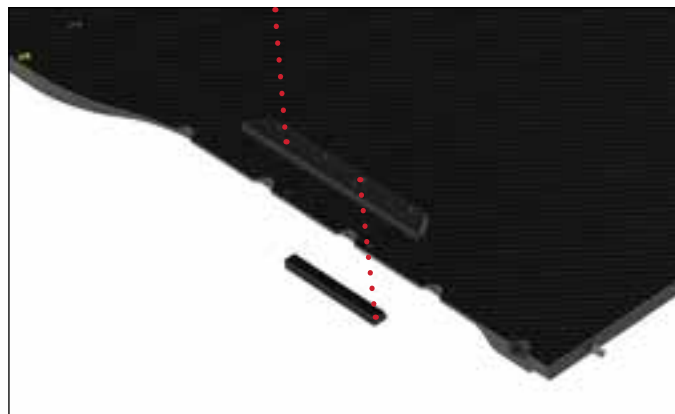

7. att.

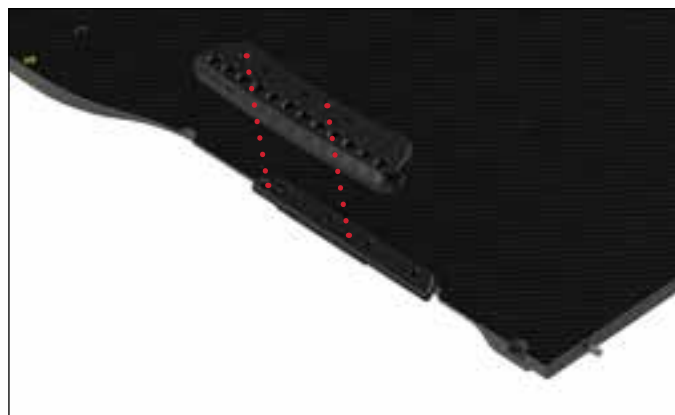

8. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESTATĪŠANA

ROKTURA BLOKA IESTATĪŠANA

Piestipriniet rokturi, kad pacients ir novietots. Ievietojiet rokturi atverē tā, lai pacients to varētu ērti satvert, kā parādīts 9. un 10. att., un reģistrējiet tā atrašanās vietu, izmantojot pievienoto pacienta iestatīšanas ierakstu.



9. att.



10. att.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NOŅEMŠANA

ROKTURA BLOKA NOŅEMŠANA

1. Noņemiet rokturus no roktura bloka.
2. Izņemiet abas skrūves, kas notur roktura bloku uz ierīces.

APKOPE

TĪRĪŠANA

Šo ierīci var tīrīt, izmantojot saudzīgas iedarbības neabrazīvu tīrīšanas vai dezinficēšanas šķīdumu. Lai tīrītu ierīci, samitriniet tīru drānu šķīdumā un noslaukiet virsmu.

DEZINFEKCIJA

Tālāk minētie tīrīšanas materiāli ir testēti un atzīti par piemērotiem ierīces virsmu tīrīšanai. Lai dezinficētu ierīci, skatiet konkrētos tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.


- Ūdens
- 10 % Clorox® balinātāja šķīdums
- Izopropilspirts
- Cidex® 2,4 % aktivizēts dialdehīda šķīdums
- Ziepes un ūdens

NESMIDZINIET tieši uz ierīces.

NELIECIET uz ierīces asus priekšmetus.

Periodiski pārbaudiet visu fiksatoru stingrību.

DAĻU SARAKSTS

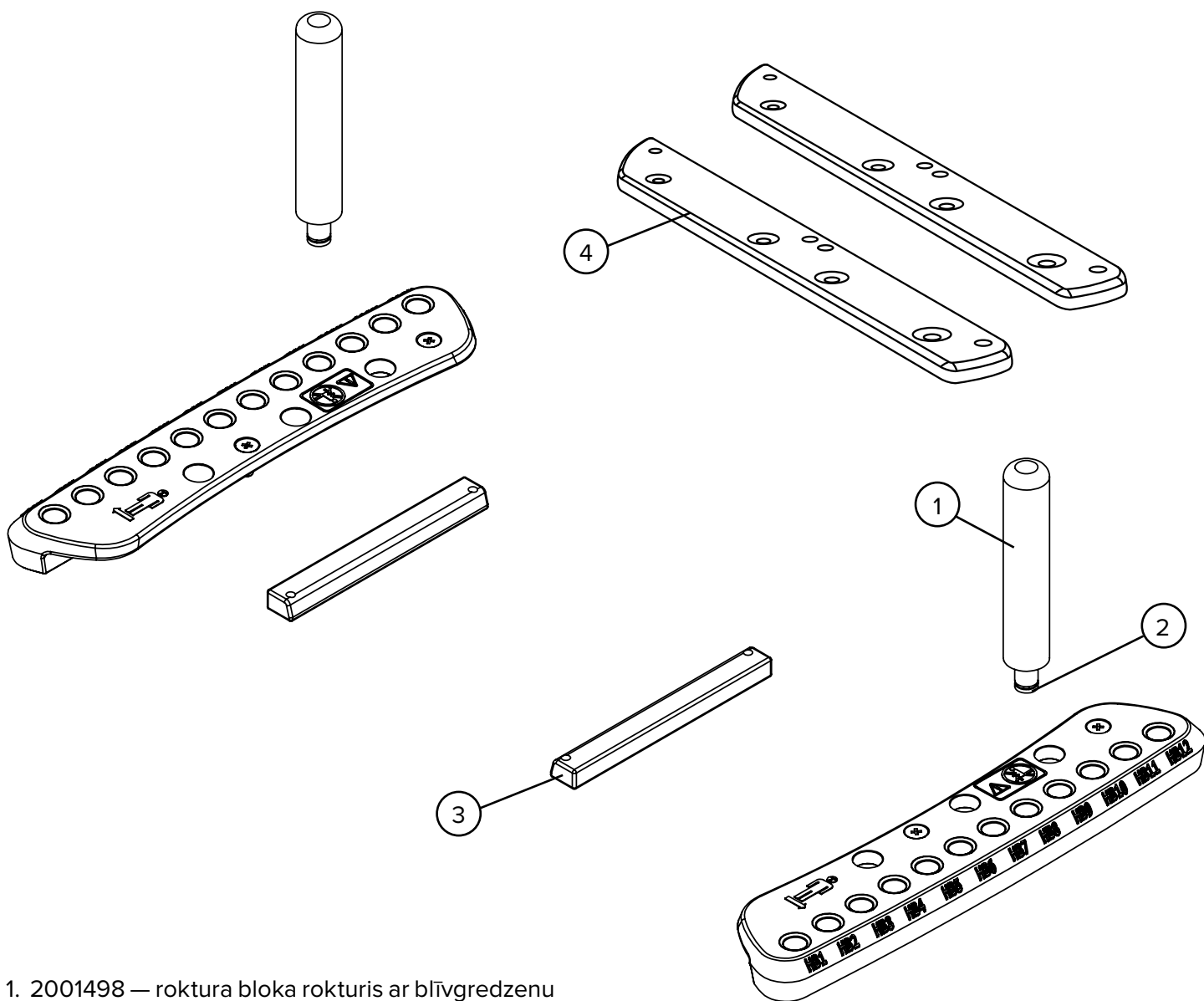

1. 2001498 — roktura bloka rokturis ar blīvģredzenu
2. 3000063 — roktura bloka roktura blīvģredzens
3. 2001774 — roktura bloka kVue adapteris
4. 2007708 — roktura bloka kVue Portrait adapteris

ĪESTATĪŠANAS LAPA

RT-4525HGA — ROKTURA BLOKS

Pacienta vārds:

Pacienta ID Nr.:



Ārsts:

Komentāri:

Iestatīja:



Datums:

1. Vai roktura bloka iestatīšana ir maza
auguma pacienta pozīcijā? **JĀ** **NĒ**

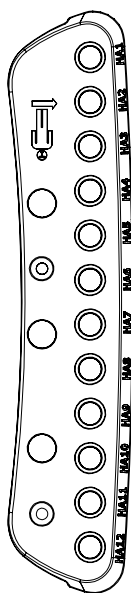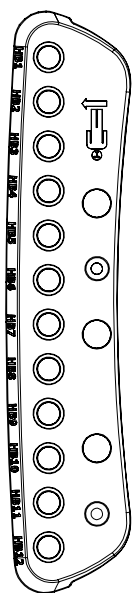

2. Pacienta labā puse: HA

3. Pacienta kreisā puse: HB

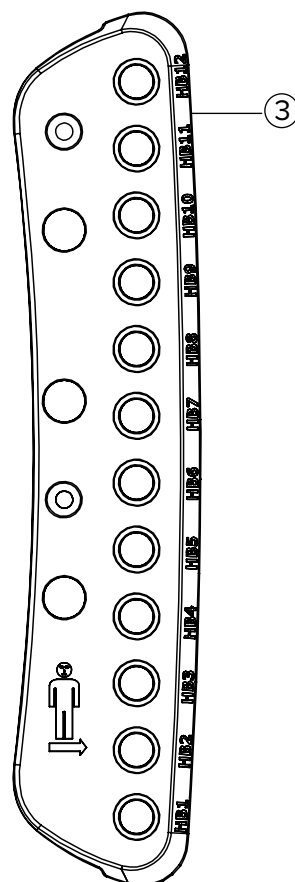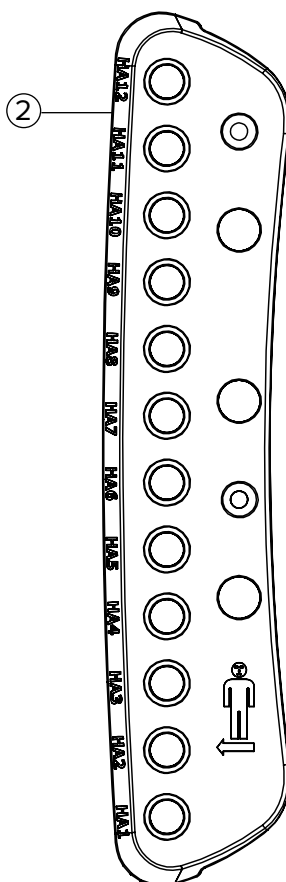



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com