

ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4525HGA

El Tutamağı Dizisi



 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Clorox®, The Clorox Company şirketinin tescilli ticari markasıdır.

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKİPMANDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. BU CİHAZIN HERHANGİ BİR PARÇASI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA DÜZGÜN ÇALIŞMAZSA DERHAL KULLANMAYI BIRAKIN VE +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 NUMARALI TELEFONDAN VEYA SUPPORT@CQMEDICAL.COM ADRESİNDEN CQ MEDICAL İLE İLETİŞİME GEÇİN.


! DİKKAT ! EL TUTAMAĞI DİZİSİNİN ÜZERİNE OTURMAYIN; AKSİ TAKDİRDE EL TUTAMAĞI DİZİSİ KIRILARAK HASTANIN YARALANMASINA NEDEN OLABİLİR.

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem CQ Medical firmasına hem de ülkenizde Yetkili Makama bildirin.

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI


Sembollerin listesi ve tanımları için CQmedical.com sitesine bakın.

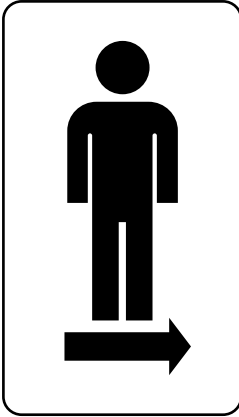

HASTANIN SOLU

Hastanın sol tarafını ifade eder ve bu taraf, kullanılan adaptörün takılması gereken taraftır.*

**Bu adaptör, küçük hastalar için tedavi sırasında diğer tarafa takılabilir.*

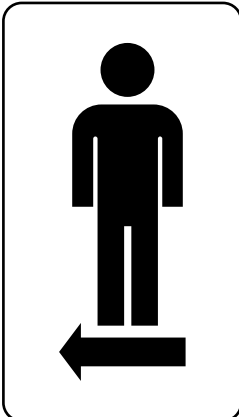

HASTANIN SAĞI

Hastanın sağ tarafını ifade eder ve bu taraf, kullanılan adaptörün takılması gereken taraftır.*

**Bu adaptör, küçük hastalar için tedavi sırasında diğer tarafa takılabilir.*

GENEL ÖNLEMLER

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI



OTURMAYIN

El Tutamağı Dizisinin üzerinde durmak veya oturmak El Tutamağı Dizisine zarar verebilir ya da yaralanmaya neden olabilir.

KULLANIM AMACI

Bu cihazın kullanım amacı, radyasyon tedavisi gören hastaları hareketsiz hale getirmek, konumlandırmak ve yeniden konumlandırmaktır.

! NOT ! Amerika Birleşik Devletleri Federal yasalarına göre bu cihaz sadece bir hekim tarafından veya hekim talimatıyla satılabilir.

Hasta Hedef Grupları

Radyasyon tedavisi ya da tanısal görüntüleme prosedürleri uygulanmakta olan hastalar.

Hedef Kullanıcılar


Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.

ÖZELLİKLER

TANIM

El Tutamağı Dizisi, hastanın ellerinin güvenilir bir şekilde indekslenerek konumlandırılmasını sağlar. Bu isteğe bağlı cihaz, simülasyondan tedaviye kadar hastanın doğru hizalanmasını sağlamaya yardımcı olur.

BİLEŞENLER

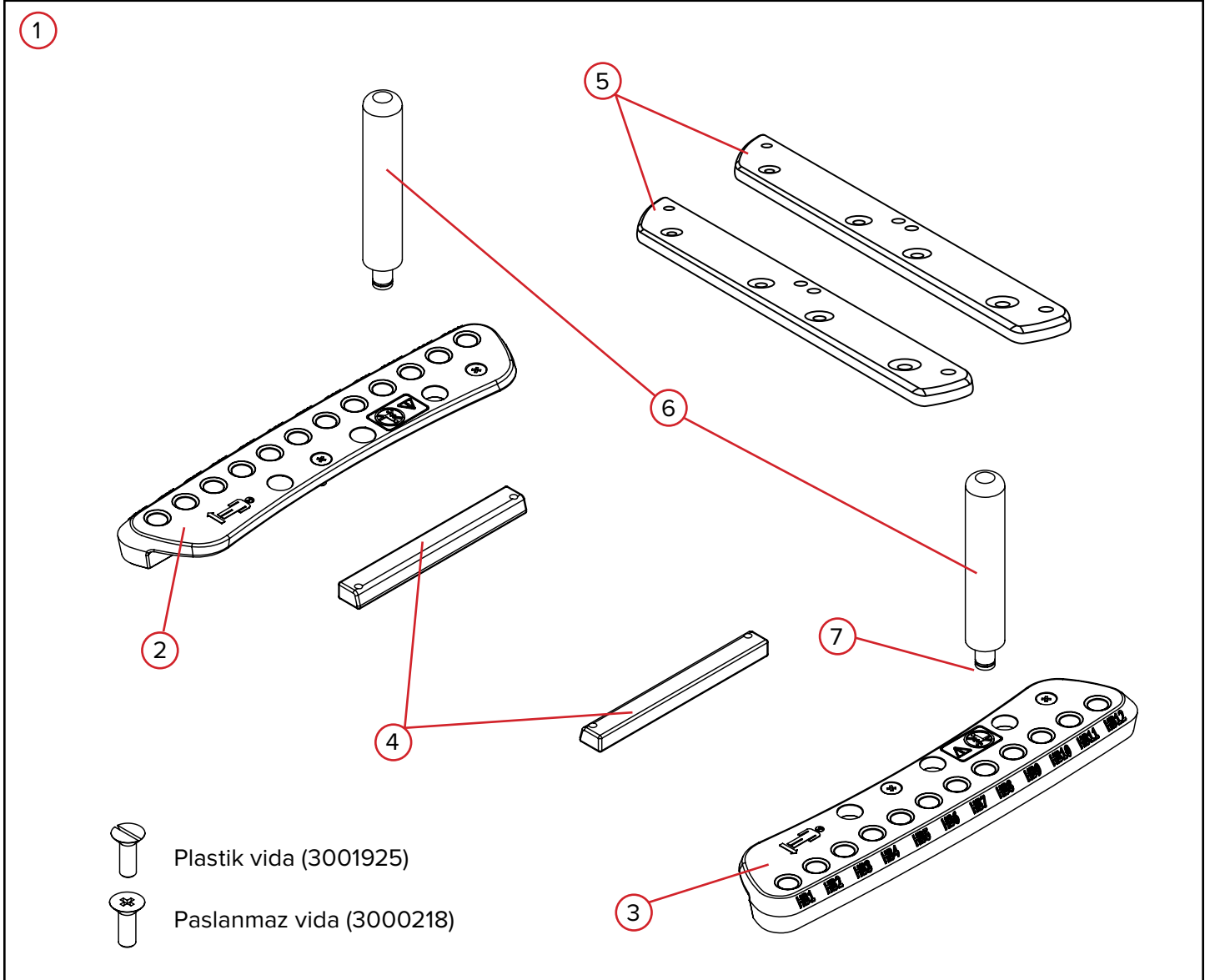

ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

1. EL TUTAMAĞI DİZİSİ

El Tutamağı Dizisi, hastanın ellerinin güvenilir bir şekilde indekslenerek konumlandırılmasını sağlar. Bu isteğe bağlı cihaz, simülasyondan tedaviye kadar hastanın doğru hizalanmasını sağlamaya yardımcı olur.

2. EL TUTAMAĞI DİZİSİ - HASTANIN SAĞI

El Tutamağı Dizisi - Hastanın Sağ, hastanın sağ tarafında bulunan El Tutamağı Dizisidir ve cihaz üzerindeki grafiklerle belirtilir. Cihaz küçük hastalar için kullanıldığında bu, ters olacaktır.

3. EL TUTAMAĞI DİZİSİ - HASTANIN SOLU

El Tutamağı Dizisi - Hastanın Solu, hastanın sol tarafında bulunan El Tutamağı Dizisidir ve cihaz üzerindeki grafiklerle belirtilir. Cihaz küçük hastalar için kullanıldığında bu, ters olacaktır.

4. KVUE İNSERT ADAPTÖRÜ

kVue İnsert Adaptörleri yalnızca El Tutamağı Dizisinin, El Tutamağı Dizisini kabul etmek için önceden açılmış delikleri olan kVue İnsertlere takılması sırasında kullanılır.

5. KVUE PORTRAIT İNSERT ADAPTÖRÜ

kVue Portrait İnsert Adaptörleri yalnızca El Tutamağı Dizisinin, El Tutamağı Dizisini kabul etmek için önceden açılmış delikleri olan kVue Portrait İnsertlere takılması sırasında kullanılır.

6. KULPLAR

Kulplar, El Tutamağı Dizisine 12 konumdan birinde indekslenir.

7. O HALKASI

O halkası, kulbu indeks konumlarının içinde tutmaya yardımcı olmak için her kulbun altına takılır.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

MONTAJ

EL TUTAMAĞI DİZİSİNİN MONTAJI

! NOT ! Eski uygulamalarda uygulanacak montaj işlemi için lütfen +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 numaralı telefondan CQ Medical ile iletişime geçin.

1. El Tutamağı Dizisini Şekil 1'de gösterilen karşılık gelen deliklerle hizalayarak cihazın üzerine yerleştirin.

! NOT ! Her bir El Tutamağı Dizisinin hangi tarafa gideceğini görmek için Genel Önlemler bölümüne bakın.

! NOT ! Çoğu cihazda El Tutamağı Dizisi cihazın başından birinci ve üçüncü deliklere monte edilir (Şekil 2'de gösterilmiştir) ancak bunun için o konuma halihazırda bir adaptör monte edilmemiş olması gerekir. Adaptör monte edilmişse El Tutamağı Dizisini bir sonraki kullanılabilir delik konumlarıyla hizalayın.

! NOT ! El Tutamağı Dizisi bir kVue İnsert üzerine monte ediliyorsa "kVue İnsertler için Montaj" kısmına bakın.

! NOT ! El Tutamağı Dizisi küçük hastalar için monte ediliyorsa



Şekil 1




Şekil 2

"Küçük Hastalar" bölümüne bakın.

2. Vidaları (3000218) bir tornavida yardımıyla saat yönünde döndürerek Şekil 3'te gösterilen karşılık gelen deliklere takın. (Gevşetmek için saat yönünün tersine döndürün).

! UYARI ! CİHAZINIZ MR GÜVENLİ ETİKETİNE SAHİPSE TEMİN EDİLEN PLASTİK VIDALARI (3001925) KULLANIN.

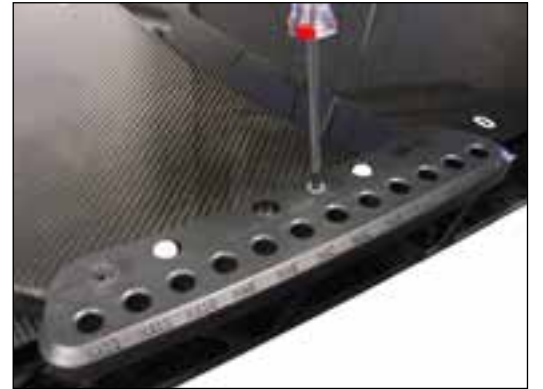

Şekil 3

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

MONTAJ


KVUE İNSERTLER İÇİN MONTAJ

El Tutamağı Dizisini bir kVue İnsert üzerine monte etmek için başka bir cihazda kullanacağınız yöntemin aynısını (daha önce gösterildiği gibi) kullanın. Buradaki tek istisna, vidanın doğrudan cihaza değil, insert adaptörüne takılmasıdır (Şekil 4 ve 5).

!NOT! El Tutamağı Dizisi tüm adaptörlerle çalışmayabilir.



Şekil 4

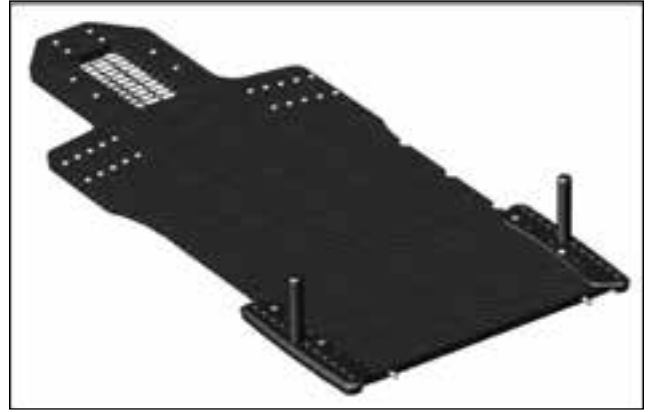

Şekil 5

KÜÇÜK HASTALAR İÇİN MONTAJ

Küçük hasta kurulumunda sol ve sağ El Tutamağı Dizisi Şekil 6'da gösterildiği gibi ters kullanılabilir.



Şekil 6


ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

MONTAJ


KVUE PORTRAIT İNSERTLER İÇİN MONTAJ

1. Temin edilen iki (2) adet ¼-20 x 1 inç vidayı kullanarak adaptörü kVue cihazına takın. Aynı işlemi diğer taraf için de tekrarlayın (Şekil 7).
2. Temin edilen iki (2) adet ¼-20 x ¾ inç düz başlı vidayı kullanarak El Tutamağı Dizisini her iki tarafa takın (Şekil 8).

!NOT! El Tutamağı Dizisi tüm adaptörlerle çalışmayabilir.

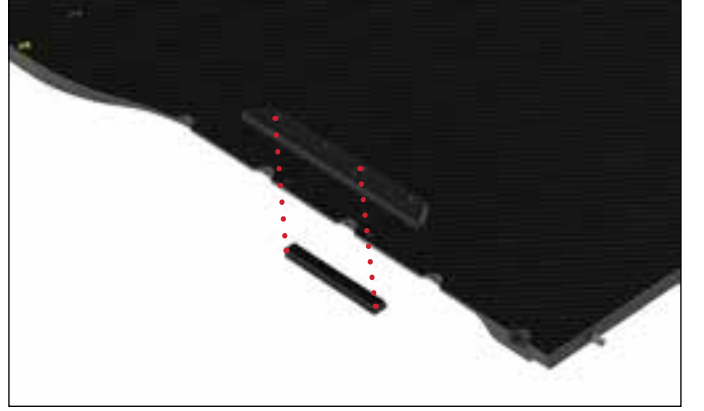

Şekil 7

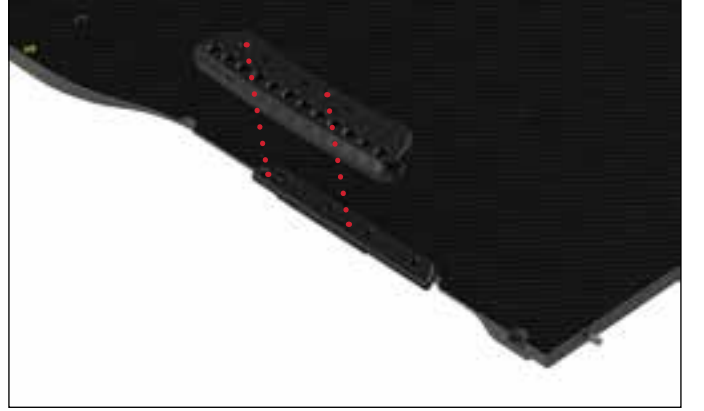

Şekil 8

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

KURULUM

EL TUTAMAĞI DİZİSİ KURULUMU

Hasta yerine yerleştikten sonra kulbu takın. Şekil 9 ve 10'da gösterildiği gibi kulbu hasta tarafından rahat bir şekilde kavranacak şekilde deliğe yerleştirin ve ekli Hasta Kurulumu Kaydını kullanarak konumunu kaydedin.



Şekil 9



Şekil 10

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

SÖKME

EL TUTAMAĞI DİZİSİNİN SÖKÜLMESİ

1. Kulpları El Tutamağı Dizisinden çıkarın.
2. El Tutamağı Dizisini cihazın üzerinde tutan iki vidayı çıkarın.

BAKIM

TEMİZLEME

Cihaz yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya dezenfektan solüsyonla temizlenebilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin.

DEZENFEKSİYON

Aşağıdaki temizlik materyalleri test edilmiş ve cihaz yüzeylerini temizlemek için uygun olduğu bulunmuştur. Cihazın dezenfekte edilmesi için temizlik maddesi üreticisinin özel talimatlarına başvurun.


- Su
- %10 Clorox® Çamaşır Suyu Solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® %2,4 Aktive Dialdehid Solüsyonu
- Sabunlu Su

Doğrudan cihaza PÜSKÜRTMEYİN.

Cihaz üstüne keskin nesneler KOYMAYIN.

Tüm tutturucuları sıklık açısından düzenli olarak kontrol edin.

PARA LİSTESİ

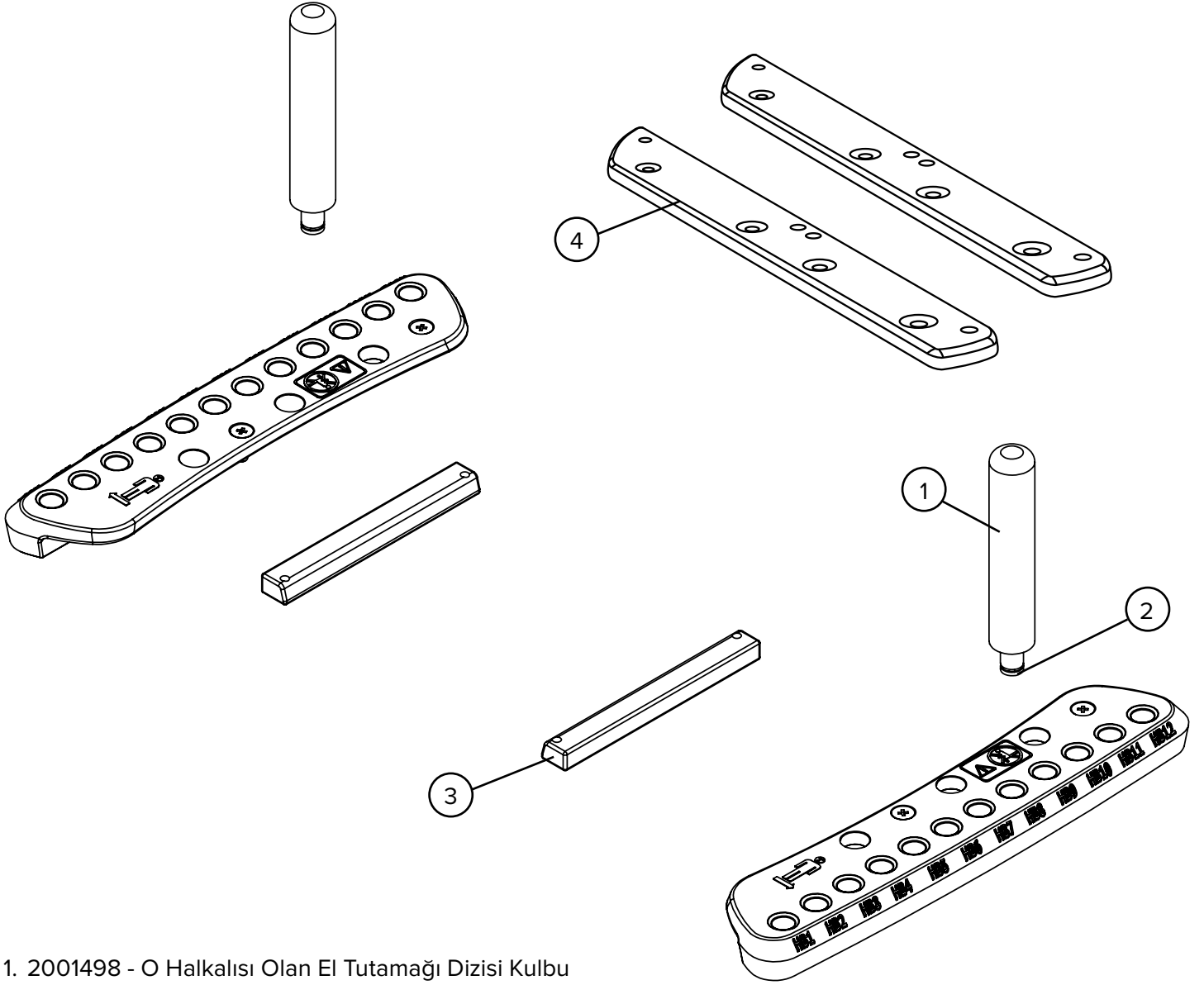

1. 2001498 - O Halkalı Olan El Tutamağı Dizisi Kulbu
2. 3000063 - El Tutamağı Dizisi Kulbu O Halkası
3. 2001774 - El Tutamağı Dizisi kVue Adaptörü
4. 2007708 - El Tutamağı Dizisi kVue Portrait Adaptörü

KURULUM SAYFASI

RT-4525HGA - EL TUTAMAĞI DİZİSİ

Hastanın Adı Soyadı:

Hasta Kimlik No:



Kurulumu yapan:

Hekim:

Tarih:

Yorumlar:

1. El Tutamağı Dizisi kurulumu Küçük Hasta Konumunda mı? **EVET** **HAYIR**

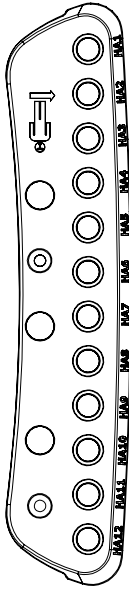
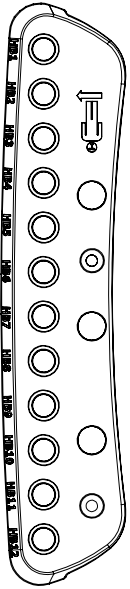


2. Hastanın Sağ Tarafı:

HA

3. Hastanın Sol Tarafı:

HB

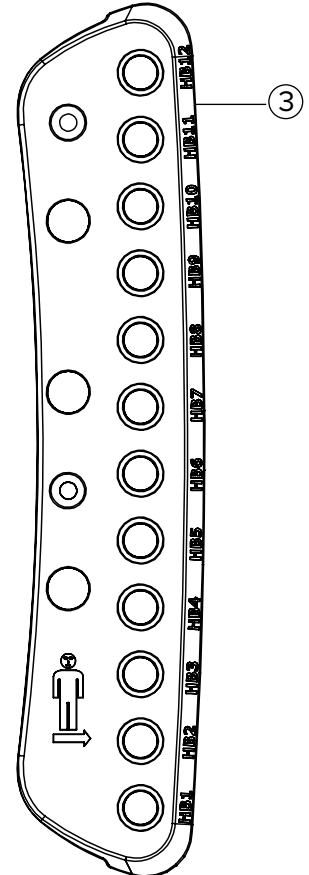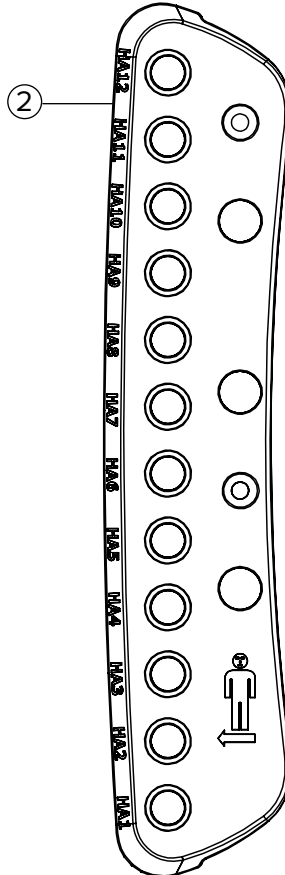



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com