



positioning
patients for life.®

PRODUKTVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL

RT-4544KV og RT-4544KV-10

kVue Access 360™ og

kVue Access 360™ G2

Prone Breast lejetopindsatser
med supraklavikulær adgang





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fremstillet i USA af Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	--

Access 360, kVue, og OneTouch er varemærker, der tilhører Qfix.

Exact® er et registreret varemærke, der tilhører Varian Medical Systems.

Clorox® er et registreret varemærke, der tilhører The Clorox Company.

Cidex® er et registreret varemærke, der tilhører Johnson & Johnson.

INDHOLDSFORTEGNELSE

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER	4
ADVARSLER	4
ALVORLIGE HÆNDELSER	4
YDERLIGERE ADVARSLER.....	4
ATTENUATION AF BEHANDLINGSSTRÅLE.....	4
BELASTNINGSKAPACITET	4
ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER.....	5
TILSIGTET ANVENDELSE	7
FUNKTIONER	8
BESKRIVELSE.....	8
NØDVENDIGT TILBEHØR.....	8
KVUE™ ACCESS 360™ KOMPONENTER.....	9
KVUE™ ACCESS 360™ G2 KOMPONENTER	10
KOMPONENTER.....	11
OPSÆTNING	13
FASTGØRELSE AF CT-HÆVEENHEDERNE OG CT-UNDERLAGSPLADER TIL OVERLEJRINGEN ...	14
INSTALLATION.....	16
POSITIONERING AF PATIENT	20
VEDLIGEHOLDELSE	22
RENGØRING AF SYSTEMET	22
DESINFICERING AF SYSTEMET	22
SPECIFIKATIONER	23
ACCESS 360™	23
ACCESS 360™ G2.....	24
PATIENTOPSÆTNING	25
KVUE™ ACCESS 360™ LEJETOPINDSATSER	25
KVUE™ ACCESS 360™ G2-LEJETOPINDSATSER	27
RESERVEDELSLISTE	29
KVUE™ ACCESS 360™ LEJETOPINDSATSER	29
KVUE™ ACCESS 360™ G2-LEJETOPINDSATSER	30

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER

ADVARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSTYR. HVIS EN DEL AF UDSTYRET KOMMER UD FOR EN MEGET STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT VÆRE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSTYRET OMGÅENDE INDSTILLES OG QFIX KONTAKTES PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! ADVARSEL ! ONETOUCH ER EN PRÆCISIONSMEKANISME OG ER KUN TIL BRUG MED GODKENDT QFIX KVUE-UDSTYR. UDSTYR, DER IKKE ER GODKENDT, IKKE ER FRA QFIX OG IKKE VALIDERET AF QFIX, ER MULIGVIS IKKE SIKKERT TIL BRUG OG VIL UGYLDIGGØRE GARANTIE, HVIS DET ANVENDES.

! ADVARSEL ! DIAGRAMMER FOR KVUE ACCESS 360™ OG KVUE ACCESS 360™ G2 ER KUN TIL REFERENCE.

ALVORLIGE HÆNDELSER

Rapportér alle alvorlige hændelser (f.eks. hændelser, der resulterer i eller har potentiale til at resultere i død eller alvorlig personskade) til både Qfix og den kompetente myndighed i dit land.

YDERLIGERE ADVARSLER

- De dobbelte håndgreb og håndgrebsstolpe er ikke designet til at understøtte patientens vægt: Anvend IKKE håndtag til at positionere patienten. Anvend IKKE håndtag til at komme op på eller ned fra enheden.
- Patienter kan have brug for hjælp til at komme op på eller ned fra enheden.
- På grund af enhedens længde anbefales det, at der er to personer til at håndtere enheden under montering og fjernelse.
- Anvend IKKE mere end 3 stablede CT-underlagsplader på én gang. Hvis det gøres, kan enheden blive ustabil.

ATTENUATION AF BEHANDLINGSSTRÅLE

De strukturelle områder i kVue Access 360™ og kVue Access 360™ G2 Couch Top Insert vil reducere en fotonstråle. Faktisk attenuation baseret på opsætningen skal verificeres med dit bestemte udstyr. Behandling gennem en hvilken som helst enhed, selv en der er fremstillet af kompositmateriale, vil føre til en øget hudddosis.

BELASTNINGSKAPACITET


UNDLAD at overskride 200 kg for en jævnt fordelt belastning eller maksimal arbejdsbelastning for legebund, alt efter hvilken der er mindst.

! BEMÆRK ! Ved kombination med legebunden fra den originale producent er belastningskapaciteten den laveste af de to tilladte arbejdsbelastninger. Belastningen på kVue Couch Top må IKKE overskride specifikationerne fra producenten af den originale legebund. Se produktliteraturen fra den originale producent.



ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER

ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER

Få en liste over symboler med definitioner på Qfix.com.

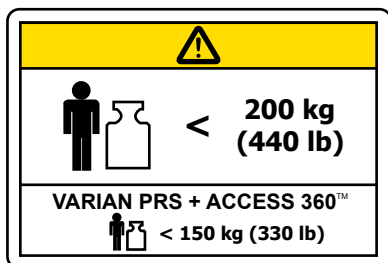

ELLER

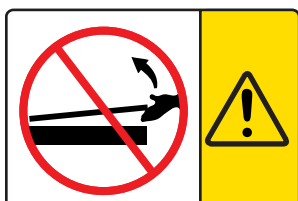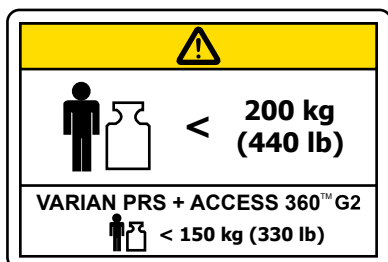

BELASTNINGSKAPACITET

UNDLAD at overskride 200 kg for en jævnt fordelt belastning eller maksimal sikker arbejdsbelastning for kVue-indsatsen eller legebunden, alt efter hvilken der er mindst.

UNDLAD at overskride 150 kg for en jævnt fordelt belastning ved anvendelse sammen med Varian PRS.

MÅ IKKE LØFTES

! ADVARSEL ! LØFT ALDRIG ENDEN AF LEJEPLADEINDSATSEN.

De sammenpassende stifter kan bøje eller knække og gøre lejepladen ubrugelig.


LINJEN "NO STEP"

Området på den anden side af brystindhakket er formgivet og afprøvet til at understøtte patientens overkrop. Det er IKKE designet til at understøtte hele patientens vægt.

Hvis der står eller sidder på lejepladeindsatsen på den anden side af brystindhakket, kan lejepladeindsatsen blive beskadiget eller forårsage personskader.


ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER

ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER

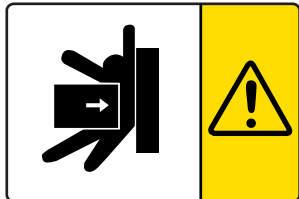

RISIKO FOR SKADER

Der er risiko for at komme til skade mellem lejepladeindsatsen og andet behandlingsudstyr. Udvis forsigtighed ved flytning af lejepladen for at undgå skader.

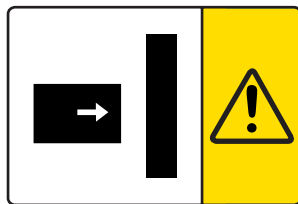

GANTRYKOLLISION

De mange forskellige bevægelser, der kan foretages med legebunde og behandlingshoveder, kan skabe situationer, hvor lejepladens indsats kan kollidere med andet udstyr, herunder gantryet.

Udvis forsigtighed ved flytning af lejet eller gantryet for at undgå udstyrs- eller patientskader.

TILSIGTET ANVENDELSE

Denne enhed er beregnet til at immobilisere, placere og flytte patienter, der får strålebehandling.

! BEMÆRK ! Ifølge amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller på en læges anvisning.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter, der gennemgår strålebehandling eller diagnostiske billeddannelsesprocedurer.

TILSIGTEDE BRUGERE

Den tilsigtede bruger til dette produkt er en person, som er kvalificeret i henhold til de lovgivningsmæssige krav i den respektive region.

FUNKTIONER

BESKRIVELSE

kVue™ Access 360™ & kVue Access 360™ G2 er udformet til at muliggøre behandling af brystcancer for både venstre og højre bryst, herunder hele brystet, dele af brystet og accelererede brystbehandlinger. Placering af patienten i bugleje er med til at øge brystets adskillelse fra kritiske organer, der er udsat for risiko. Dette betyder, at hjerte, lunger og omgivende sundt væv eksponeres mindre, mens der gives mulighed for:

- En mere ensartet levering af dosis
- Mindre hudtoksicitet
- Reduceret åndedrætsbevægelse

Det blanke, fritsvævende design giver både oblique og ikke-koplanar adgang, hvilket potentielt muliggør højere dosis pr. fraktion. Da strålebanen primært går gennem brystet med minimal forstyrrelse fra lejepladen, kan artefakter og spredning minimeres.

Access Prone G2 (RT-4544-01) kan bruges som en CT/MR-simuleringsenhed til Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).


! ADVARSEL ! ACCESS 360 (RT-4544KV) KAN IKKE BRUGES SOM EN SIMULERINGSENHED FOR NOGET PRODUKT UD OVER SIG SELV ELLER ANDRE ACCESS 360 (RT-4544KV)-ENHEDER.

NØDVENDIGT TILBEHØR

CT-hæveenheder (til simulering)


FUNKTIONER

KVUE™ ACCESS 360™ KOMPONENTER

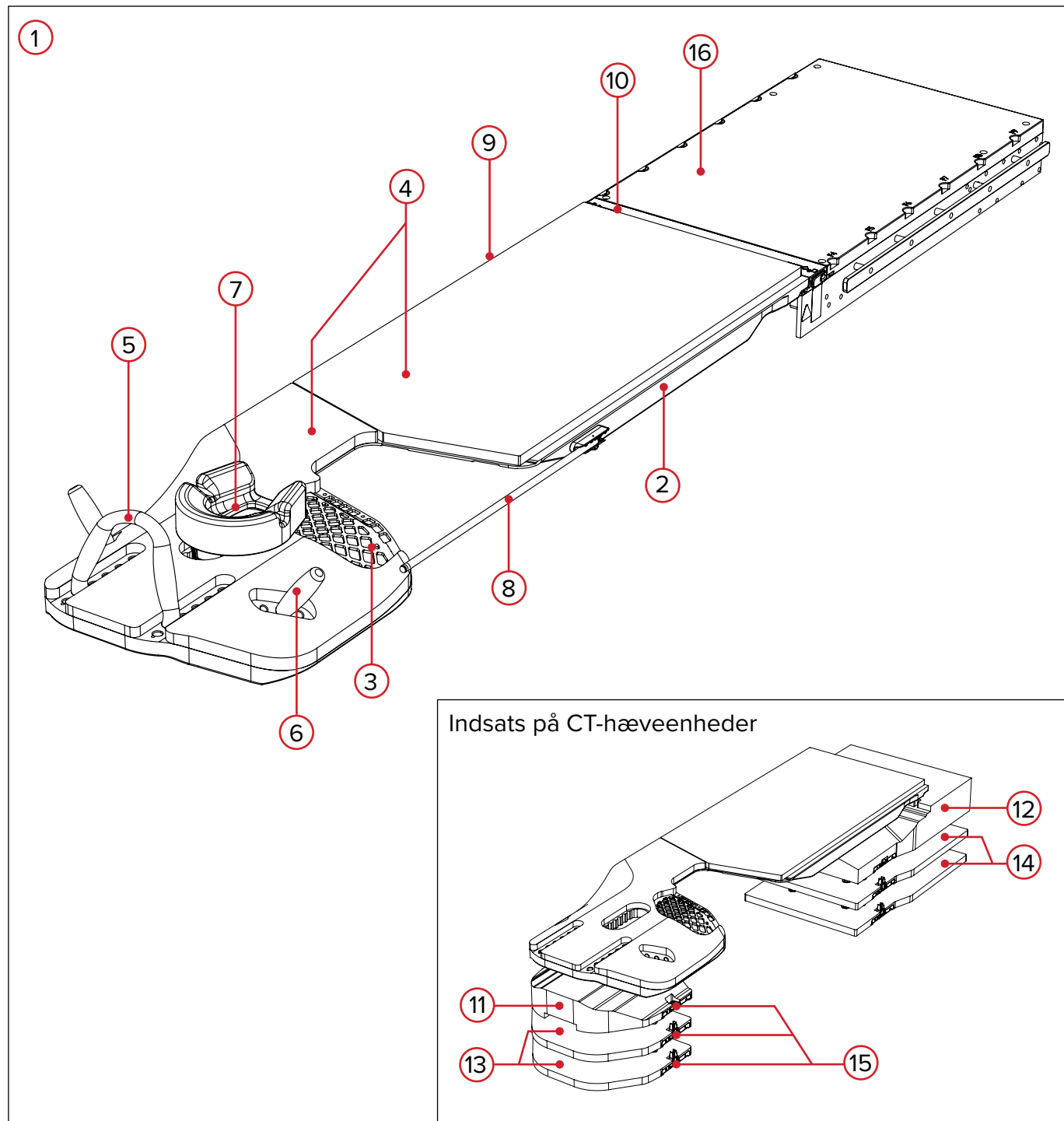

FUNKTIONER

KVUE™ ACCESS 360™ G2 KOMPONENTER

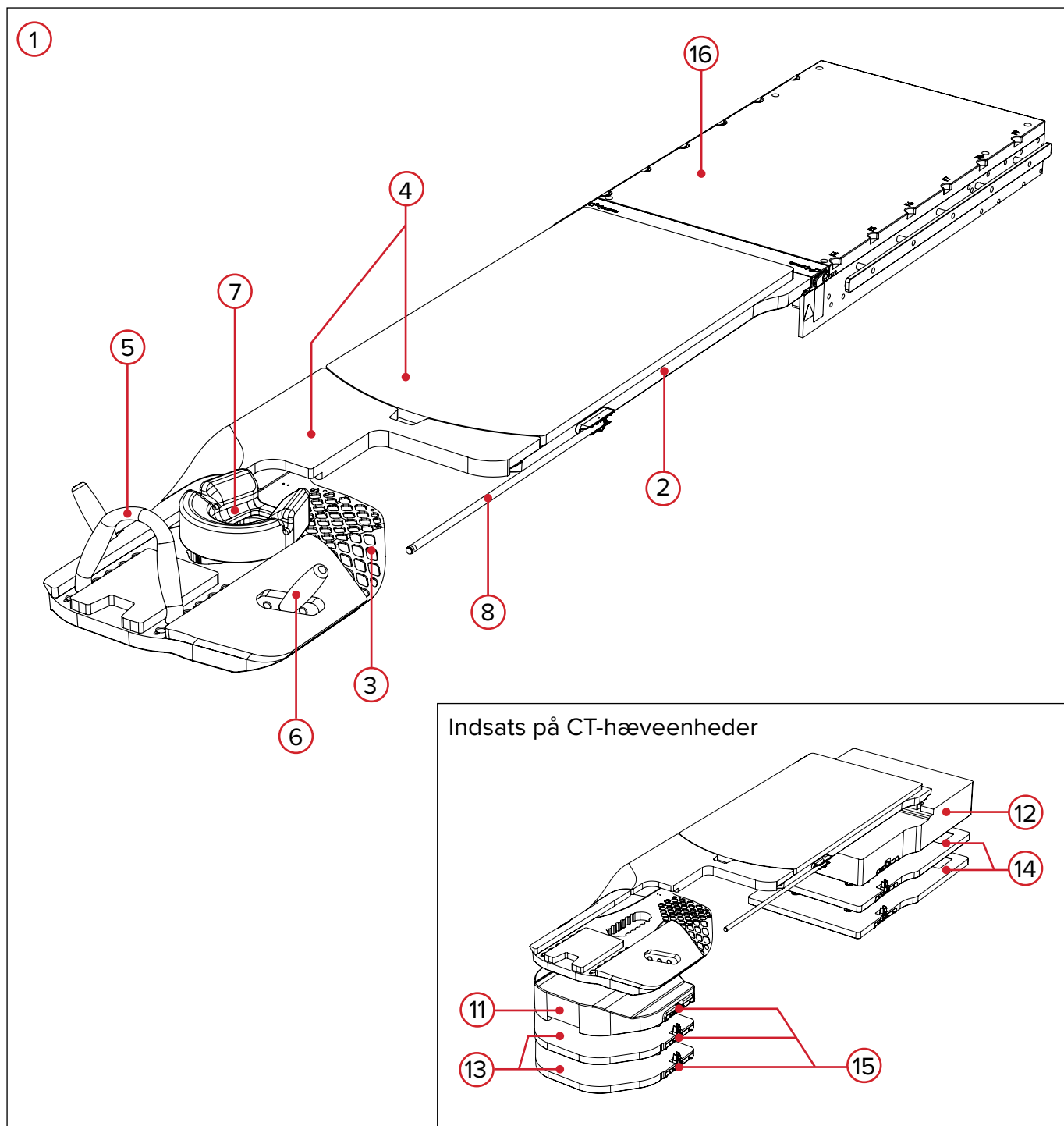

FUNKTIONER

KOMPONENTER

1. KVUE™ ACCESS 360™ OG KVUE™ ACCESS 360™ G2 PRONE BREAST COUCH TOP INSERT SYSTEM

Access 360™ og Access 360™ G2 Oanvendes til hjælp ved positionering og opsætning af patienter, der får foretaget røntgenbehandling af brystet og kravebensområdet i liggende stilling.

2. KVUE™ ACCESS 360™ OG KVUE™ Access 360™ G2 PRONE BREAST COUCH TOP INSERT

kVue-systemet gør det muligt hurtigt og let at skifte mellem højre og venstre Access 360™ & Access 360 G2 så vel som andre kVue-lejepladeindsatser. Indsatsen indeholder et gitter, der gør det muligt at behandle kravebensområdet.

3. SUPRAKLAVIKULÆRT GITTER

Kravebensgitteret gør det muligt at behandle kravebensområdet med lav attenuation.

4. PUDER

Puderne er til patientkomfort. De kan dog fjernes, og der kan anvendes vakuumpuder. Puderne har også yderligere positioneringsgrafik.

5. DOBBELTHÅNDGREB

Dobbelthåndgrebet er ergonomisk udformet til at reducere tryk på patientens håndled, i modsætning til en standardstolpe, der anvendes sammen med andet udstyr.

6. HÅNDGREBSSTOLPE

Håndgrebsstolpe er til patienter med nedsat mobilitet.

7. HOVEDSTØTTER

Systemet leveres med en hovedstøtte til bugleje og en konturhovedstøtte. Begge kan anvendes afhængigt af præferencen for opsætningen. De kan indekseres til indsatsen mange steder afhængigt af patientens højde.

8. IPSILATERAL SKALA

Den ipsilaterale skala svinger og klikker foroven ved opsætning og svinger tilbage forned ved behandling og opbevaring. Skalaen kan anvendes som en justeringshjælp. Dens nøjagtighed er ± 1 mm.

9. KONTRALATERAL SKALA

Access 360: Den kontralaterale skala er placeret på den kontralaterale side af indsatsen og kan anvendes som en justeringshjælp. Skalaens nøjagtighed er ± 1 mm. (Kun tilgængelig på Access 360)

Access 360 G2: Yderligere ipsilaterale skalaer er tilgængelige på den kontralaterale side. (Kun Access 360 G2)

10. NEDRE SKALA

Den nedre skala er placeret under knæmarkeringerne på indsatsen og kan anvendes som en justeringshjælp. Skalaens nøjagtighed er ± 1 mm. (Kun tilgængelig på Access 360)

FUNKTIONER

KOMPONENTER

11. ØVRE CT-HÆVEENHED

Den øvre CT-hæveenhed indekseres til CT-overlejringen med en lokaliseringsstang. Den hæver den øvre ende af indsatsen 13 cm og anvendes sammen med den nedre CT-hæveenhed under simulering.

12. NEDRE CT-HÆVEENHED

Den nedre CT-hæveenhed indekseres til CT-overlejringen med en lokaliseringsstang. Den hæver den nedre ende af indsatsen 13 cm og anvendes sammen med den øvre CT-hæveenhed under simulering.

13. ØVRE UNDERLAGSPLADE TIL CT-HÆVEENHED

CT-hæveenhedens underlagsplade indekseres til en lokaliseringsstang og hæver den øvre CT-hæveenhed i tilvækster på 2,5 cm. Denne underlagsplade kan klikke fast på en anden øvre underlagsplade til CT-hæveenheden så vel som til den øvre CT-hæveenhed.

14. NEDRE UNDERLAGSPLADE TIL CT-HÆVEENHED

CT-hæveenhedens underlagsplade indekseres til en lokaliseringsstang og hæver den nedre CT-hæveenhed i tilvækster på 2,5 cm. Denne underlagsplade kan klikkes fast på en anden nedre underlagsplade til CT-hæveenheden og kan skrues ind i den nedre CT-hæveenhed.

15. INDEKSERINGSPLADE

CT-hæveenhederne indeholder indekseringsplader, som placerer CT-hæveenhederne på lejepladen med en lokaliseringsstang. Indekseringspladerne på CT-hæveenhederne højdejusteres ved at klikke ind i indekseringspladerne på CT-underlagspladerne.

16. kVUE™ COUCH TOP


kVue Couch Top er et komplet patientstøttesystem, ikke medregnet den originale udstyrslejbund. Enheden består af bundrammen (herunder støttebjælkerne), grænsefladepladen (hvis den er påkrævet) og den relevante kVue-lejepladeindsatsen. (Der står flere oplysninger i monterings- og brugervejledningen til kVue-enheden).

BRUGSANVISNING

OPSÆTNING

MONTERING AF LOKALISERINGSSTANG

Lokaliseringsstangen er udstyret med to lokaliseringstifter, der passer til det meste standardmæssige positioneringstilbehør. Fastgør den ved at anbringe hver ende af lokaliseringsstangen i de rette kompatible Varian Exact®-indekshuller, og klik den på plads.

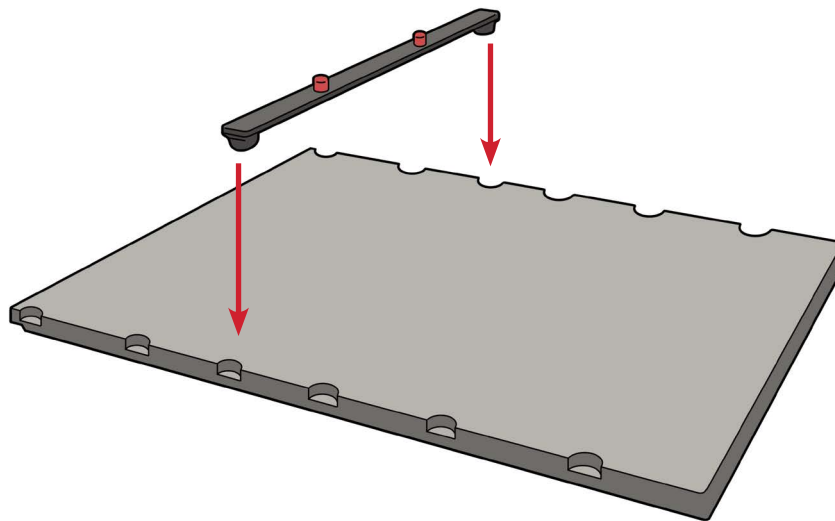

BRUGSANVISNING

! BEMÆRK ! På grund af enhedens længde anbefales det, at der er to personer til at håndtere enheden under montering og fjernelse.

FASTGØRELSE AF CT-HÆVEENHEDERNE OG CT-UNDERLAGSPLADER TIL OVERLEJRINGEN

1. Fastgør 2 lokaliseringsstænger med en indbyrdes afstand på 1260 mm (typisk 9 indekshuller), og klik lokaliseringsstængerne på plads. (Fig. 1 og 2)

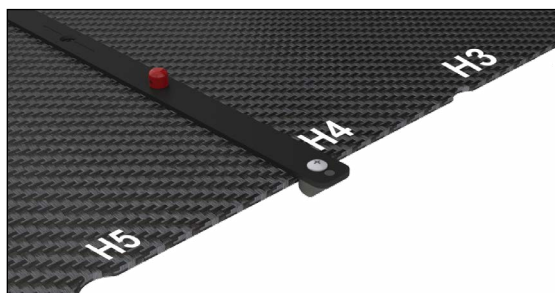


Fig. 1

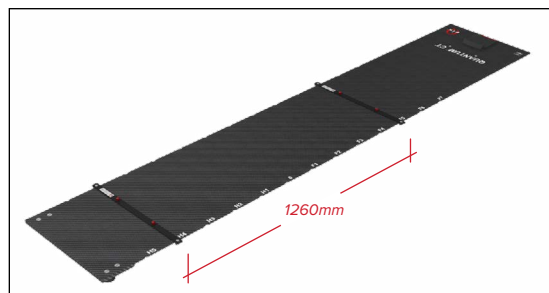


Fig. 2

2. Placer CT-hæveenhederne på CT-underlagspladerne, afhængigt af din tiltænke opsætning, på lokaliseringsstængerne (Fig. 3 & 4). Sørg for at indeksere CT-hæveenhederne og CT-underlagspladerne med de samme placeringer på både de nedre og øvre CT-hæveenheder A, B, C eller D. (Fig. 5, 6, & 7) Underlagsplader kan stables på hinanden for at øge højden med tilvækster på 2,5 cm.

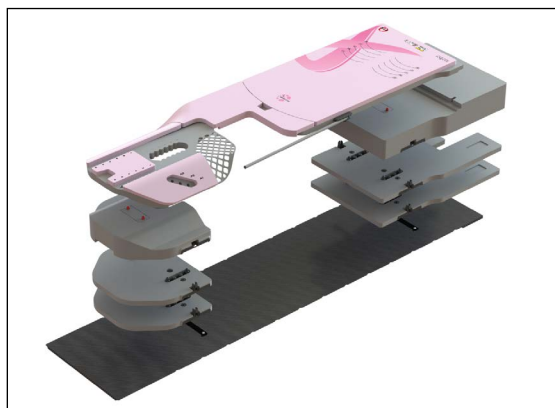


Fig. 3

ELLER

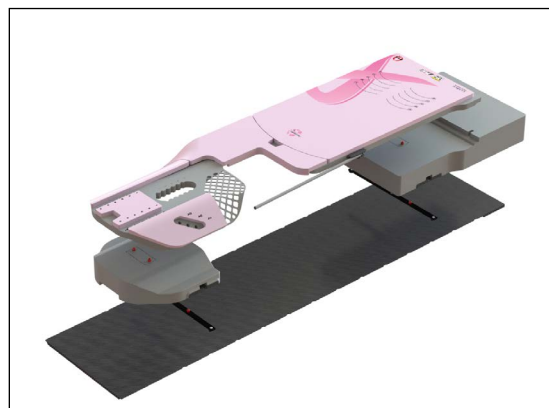


Fig. 4

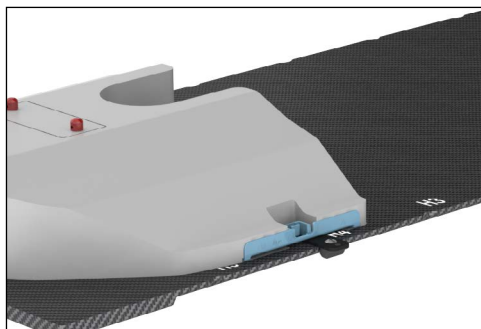


Fig. 5

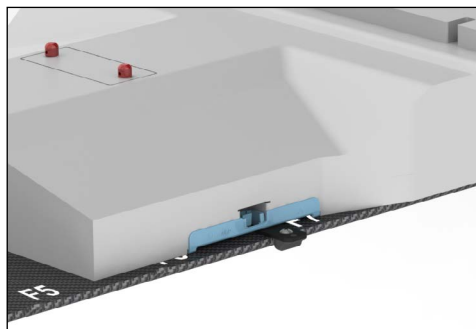


Fig. 6



Fig. 7

BRUGSANVISNING

3. For at mindske højden af enheden eller fjerne CT-hæveenheder og -underlagsplader, skal du fjerne Access 360 eller Access 360 G2. Mens du trykker på udløserknapperne på hver side af indekseringspladen, løftes CT-hæveenheden eller CT-underlagspladen væk fra CT-underlagspladen og fjernes. (Fig. 8)

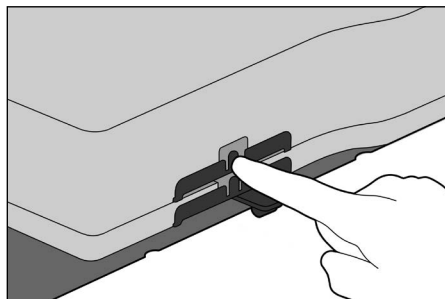


Fig. 8


BRUGSANVISNING

INSTALLATION

! BEMÆRK ! På grund af enhedens længde anbefales det, at der er to personer til at håndtere enheden under montering og fjernelse.

MONTERING AF LEJEPLADEINDSATS




1. Anbring kVue-lejepladeindsatsen oven på støttebjælkerne, og juster de to sammenpassende stifter med modtagerhullerne i OneTouch Latch.
2. Før lejepladeindsatsen direkte ind i modtagerhullerne fra hovedenden af kVue-lejepladen. Du vil høre et klik, når lejepladeindsatsen låses på plads. Ved korrekt montering er det KUN den grønne knapflade, der vil være synlig.

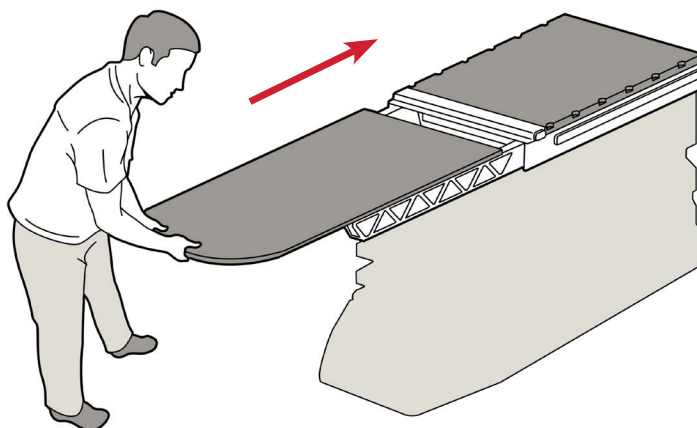

AFTAGNING AF LEJEPLADEINDSATS

! LØFT ALDRIG ENDEN AF LEJEPLADEINDSATSEN ! SELVOM MEKANISMEN ER MEGET ROBUST, KAN DE SAMMENPASSENDE STIFTER BØJE ELLER KNÆKKE OG GØRE LEJEPLADEN UBRUGELIG.

1. Drej grebet mod uret.
2. Træk det roterede greb fra den ene side af lejepladen, indtil lejepladeindsatsen er udløst. Dette kan gøres med én hånd.
3. Før lejepladeindsatsen væk fra lejepladen.

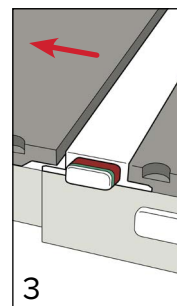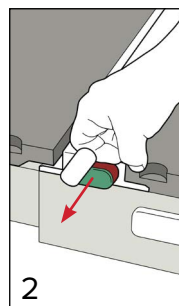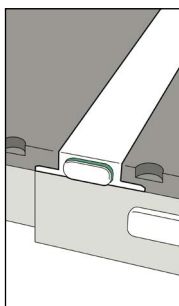

BRUGSANVISNING

OPSÆTNING

HOVEDSTØTTE

1. Vælg enten at bruge hovedstøtten til bugleje eller konturhovedstøtten til patienten. (Hovedstøtte til bugleje vist nedenfor)
2. Indsæt plastjusteringsstykket i det relevante hul (A, B, C, D, E, F) i den øverste ende af enheden. (Fig. 9 og 10)
3. Fjern eller flyt hovedstøtten ved at trække den op og væk fra indsatsen.

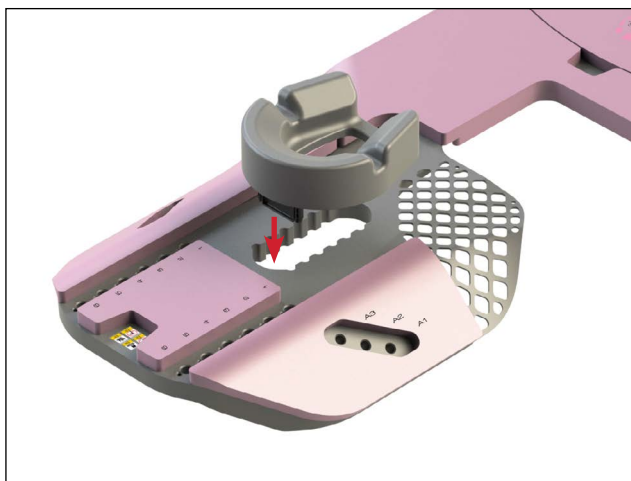


Fig. 9

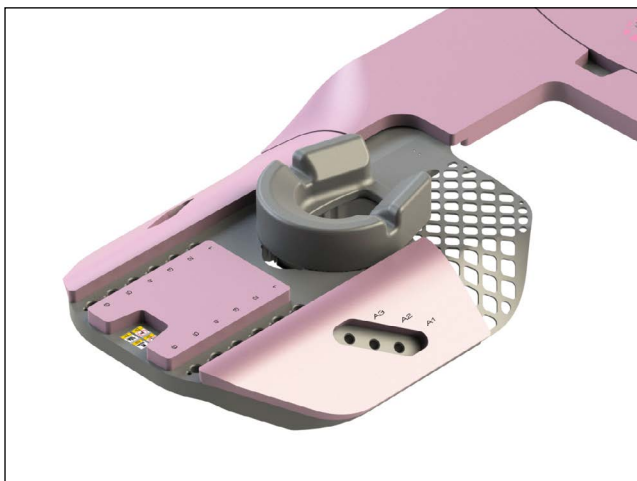


Fig. 10

BRUGSANVISNING

OPSÆTNING

DOBBELTHÅNDGREB

! FORSIGTIG ! DOBBELTHÅNDGREBET OG DET HÅNDGREBSSTOLPE ER IKKE DESIGNET TIL AT UNDERSTØTTE PATIENTENS VÆGT:

- Anvend IKKE håndtag til at positionere patienten.
- Anvend IKKE håndtag til at komme op på eller ned fra enheden.

1. Juster dobbelthåndgreb ender med de tilsvarende huller (1, 2, 3, 4, 5, 6) i den øverste ende af indsatsen.
2. Tryk ned på dobbelthåndgreb, indtil det klikker ind i hullerne. (Fig. 11 og 12)

! BEMÆRK ! Dobbeltthåndgreb skal trækkes tilbage, så det danner en bue mod patienten, som vist på billedet herunder. (Fig. 10)

3. Fjern eller flyt dobbelthåndgreb ved at trække det opad, indtil det klikker ud af hullerne. (Fig. 11 og 13)

! BEMÆRK ! Tryk på det øverste af indsatsen, når håndtagene fjernes, så den IKKE løfter sig opad. Selvom mekanismen er meget robust, kan de sammenpassende stifter bøje eller knække og gøre lejepladen ubrugelig.

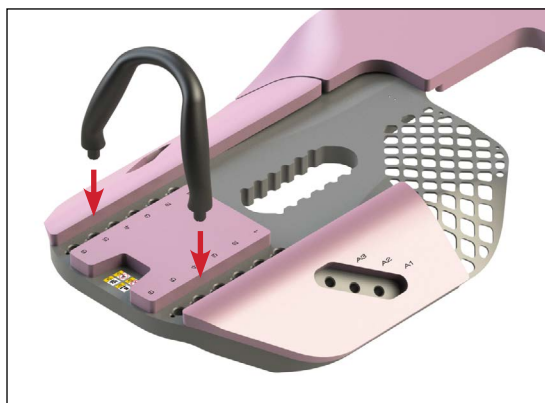


Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

BRUGSANVISNING

OPSÆTNING

IPSILATERALT HÅNDBREBSSTOLPE

1. Indsæt håndgrebsstolpe i det relevante hul (A1, A2, A3) i den øverste ende af indsatsen. (Fig. 14)
2. Drej håndgrebsstolpe i den ene eller den anden retning, indtil håndtaget sidder fast i hullet og låses på plads. (Fig. 15)
3. Fjern håndgrebsstolpe ved at dreje det i den modsatte retning af monteringen, indtil håndtaget løsner sig, og træk det derefter lige ud. (Fig. 14 og 15)

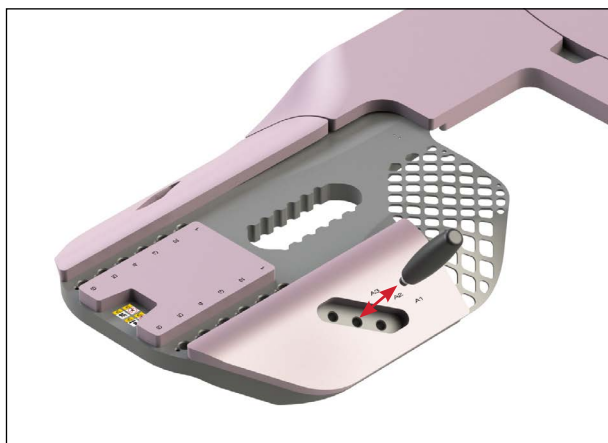


Fig. 14

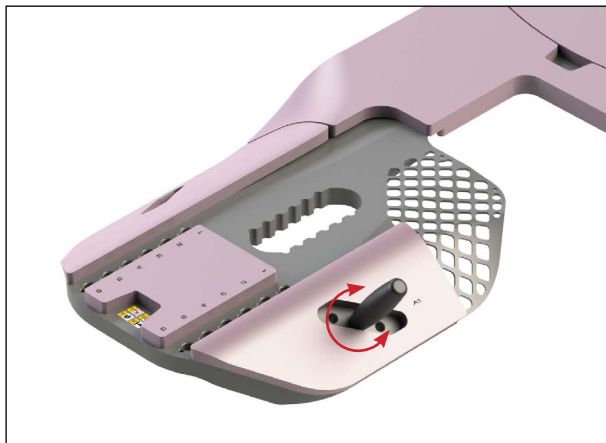


Fig. 15

BRUGSANVISNING

POSITIONERING AF PATIENT

! BEMÆRK ! Patienter kan have brug for hjælp til at komme op på eller ned fra enheden. Nedenstående instruktioner er vores foreslåede teknik, men kan variere for hver klinik.

SÅDAN KOMMES OP PÅ OG NED FRA ACCESS 360™ OG ACCESS 360™ G2

1. Sænk lejet, eller anvend en trappestol til at hjælpe patienten med at komme op på indsatsen.
2. Ret patientens knæ ind med de rette markeringer på skumgummiets, når han eller hun ligger på indsatsen.
3. Få patienten til at bruge sine hænder eller albuer til at flytte sin overkrop på plads.
4. Få patienten til langsomt at sænke sig på plads.
5. Når patienten er på plads, så anbring hans/hendes hoved i hovedstøtten og få ham/hende til at tage fat i de behørigte håndgreb.
6. Kom ned fra indsatsen ved at følge trinene i omvendt rækkefølge.

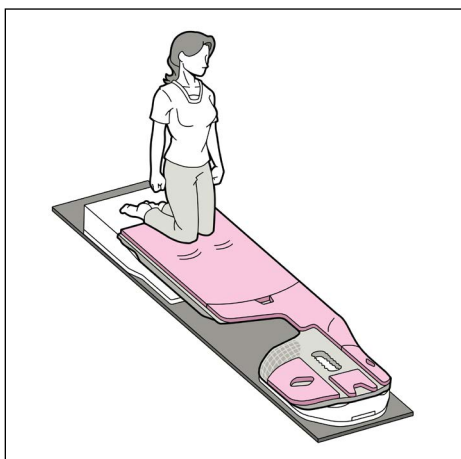


Fig. 16

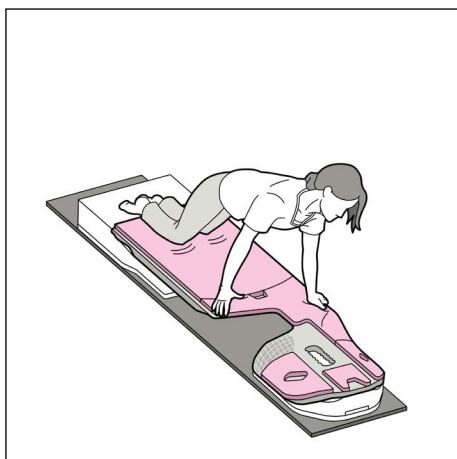


Fig. 17

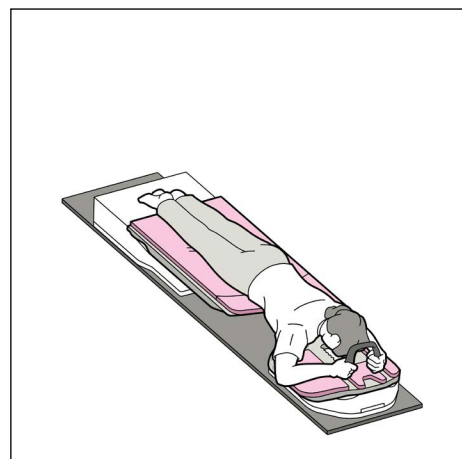


Fig. 18

BRUGSANVISNING

OPSÆTNING

IPSILATERAL SKALA

! FORSIGTIG ! DEN IPSILATERALE SKALA ER IKKE DESIGNET TIL AT UNDERSTØTTE EN PATIENTS VÆGT.

1. Når patienten er på plads, svinges den ipsilaterale skala op, indtil den låses på plads. (Fig. 20)
2. Ret patienten ind.

! BEMÆRK ! Skalaerne findes som en justeringshjælp. Det er brugerens ansvar at bekræfte patientens position.

! BEMÆRK ! Skalaernes nøjagtighed er afprøvet til ± 1 mm

3. Sving den ipsilaterale skala ned, indtil den er i opbevaringsposition før behandling og/eller opbevaring. (Fig. 19 og 20)



Fig. 19: Opbevaringsposition



Fig. 20

VEDLIGEHOELSE

RENGØRING AF SYSTEMET

Udstyret kan rengøres med et mildt, ikke-slibende rengørings- eller desinfektionsmiddel. Undlad at spraye eller hælde væsker på overfladen, da de kan trænge ind i mekanismerne i enheden. Rengør udstyret ved at påføre midlet på en ren klud og tørre overfladen af.

DESINFICERING AF SYSTEMET

Følgende rengøringsmaterialer er blevet testet og fundet at være egnede til rengøring af overfladen på kVue-lejepladen. Se de specifikke anvisninger fra producenten af rengøringsmidlet vedrørende desinfektion af overfladen på kVue-lejepladen.

- Vand
- En 10 % Clorox®-blegeopløsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiveret dialdehydmiddel
- Sæbe og vand


UNDLAD at spraye direkte på lejepladen eller lejepladeindsatsen eller at lade væsken trænge ind i bundrammen.

Anbring IKKE skarpe genstande på lejepladen eller lejepladeindsatsen.

SPECIFIKATIONER

ACCESS 360™


Vægtgrænse: 200 kg ved en jævnt fordelt belastning.

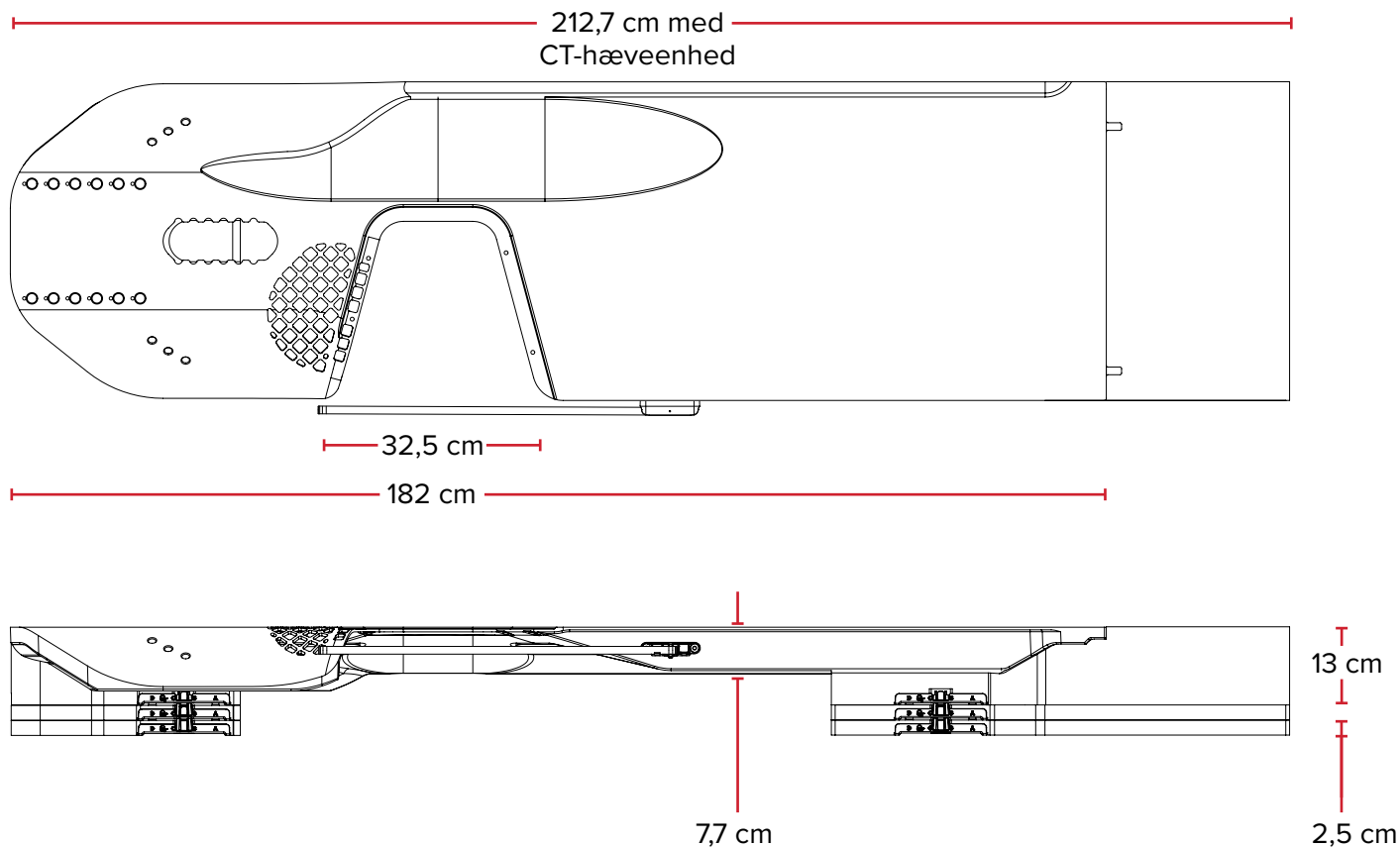

SPECIFIKATIONER

ACCESS 360™ G2

Vægtgrænse: 200 kg ved en jævnt fordelt belastning.

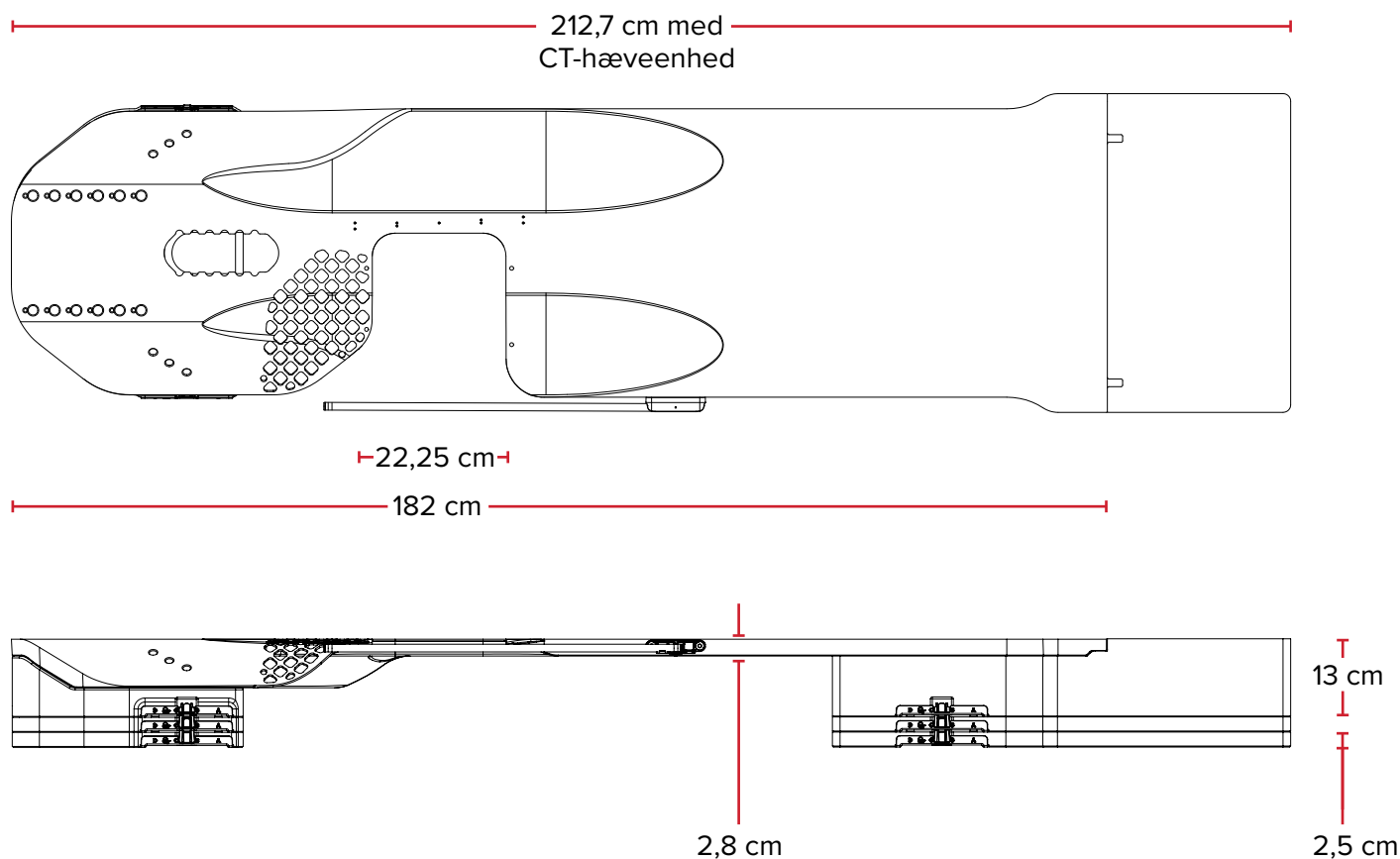

PATIENTOPSÆTNING

KVUE™ ACCESS 360™ LEJETOPINDSATSER

Patientens navn:


Patient-ID nr.:

Opsat af:

Læge:

Dato:

Kommentarer:

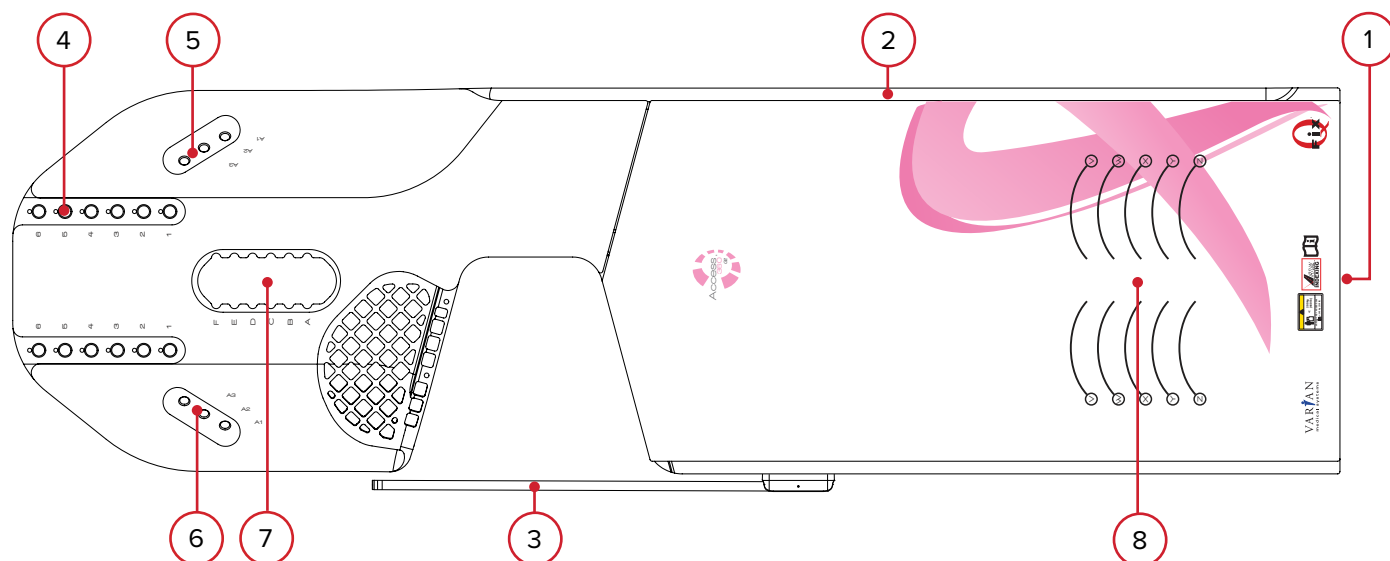

Venstre indsats

Højre indsats

! BEMÆRK ! Venstre indsats er vist oven for.

1. Nedre justering:

2. Kontralateral skala:

3. Ipsilateral skala:

4. Placering af dobbelthåndgreb (vælg én): 1 2 3 4 5 6 N/A

5. Håndgrebsstolpe, patient, højre (vælg én): A1 A2 A3 N/A

6. Håndgrebsstolpe, patient, venstre (vælg én): A1 A2 A3 N/A


7. Hovedstøtte anvendt: Ingen Bugleje Kontur Placering (vælg én): A B C D F

8. Knæplacering (vælg én): V W X Y Z

9. Yderligere bemærkninger:

PATIENTOPSÆTNING

KVUE™ ACCESS 360™ LEJETOPINDSATSER (FORTSAT)

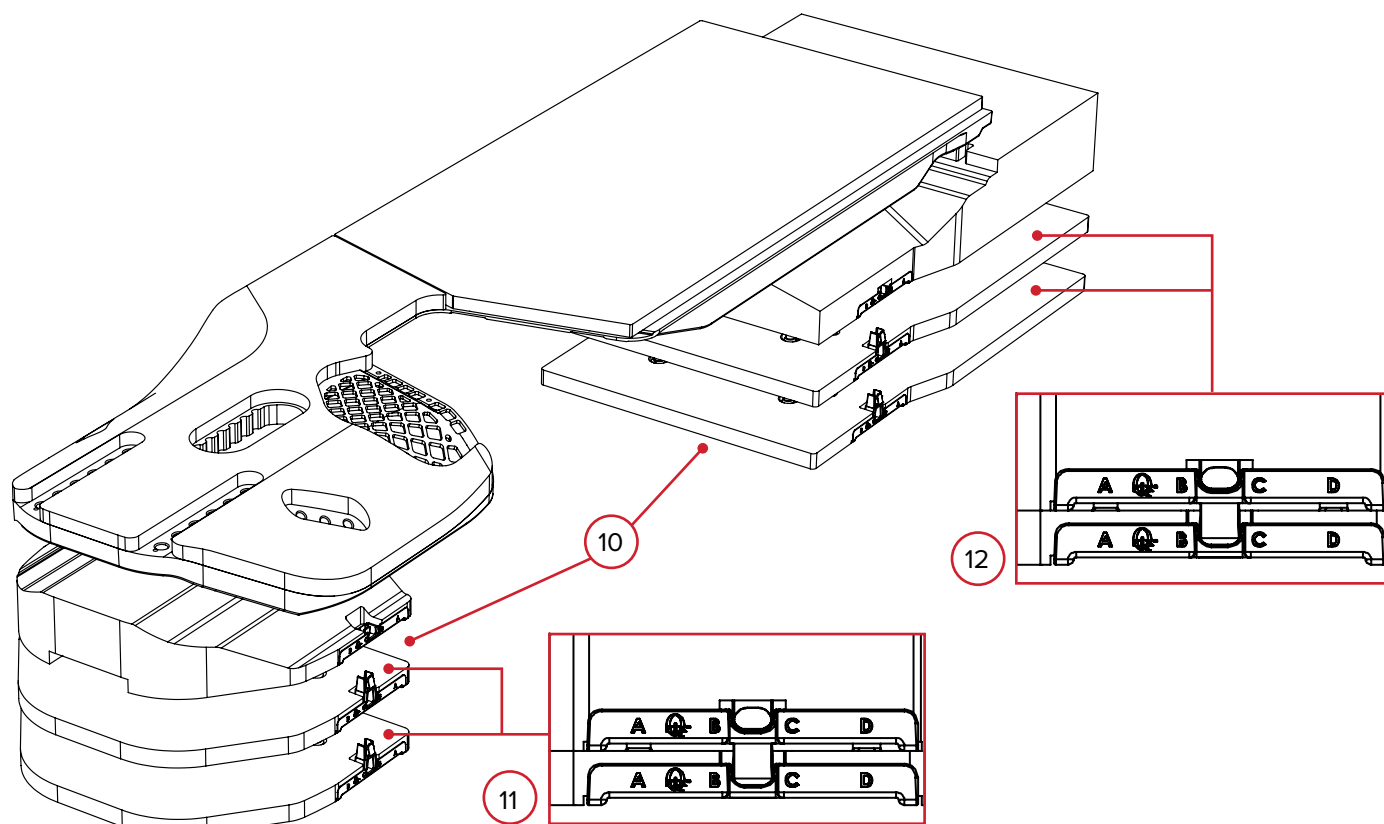

! BEMÆRK ! Venstre indsats er vist oven for.

CT-hæveenheder og underlagsplader

10. Hvor mange sæt CT-hæveunderlagsplader anvendes vælg én): **0** **1** **2** **3**

11. Øvre CT-hæveenhed – placering på lokaliseringsstang (vælg én): **A** **B** **C** **D**

11a) Placering af lokaliseringsstang på lejeplade:

12. Nedre CT-hæveenhed – placering på lokaliseringsstang vælg én): **A** **B** **C** **D**

12a) Placering af lokaliseringsstang på lejeplade:

13. Yderligere bemærkninger:

PATIENTOPSÆTNING

KVUE™ ACCESS 360™ G2-LEJETOPINDSATSER

Patientens navn:


Patient-ID nr.:

Opsat af:

Læge:

Dato:

Kommentarer:

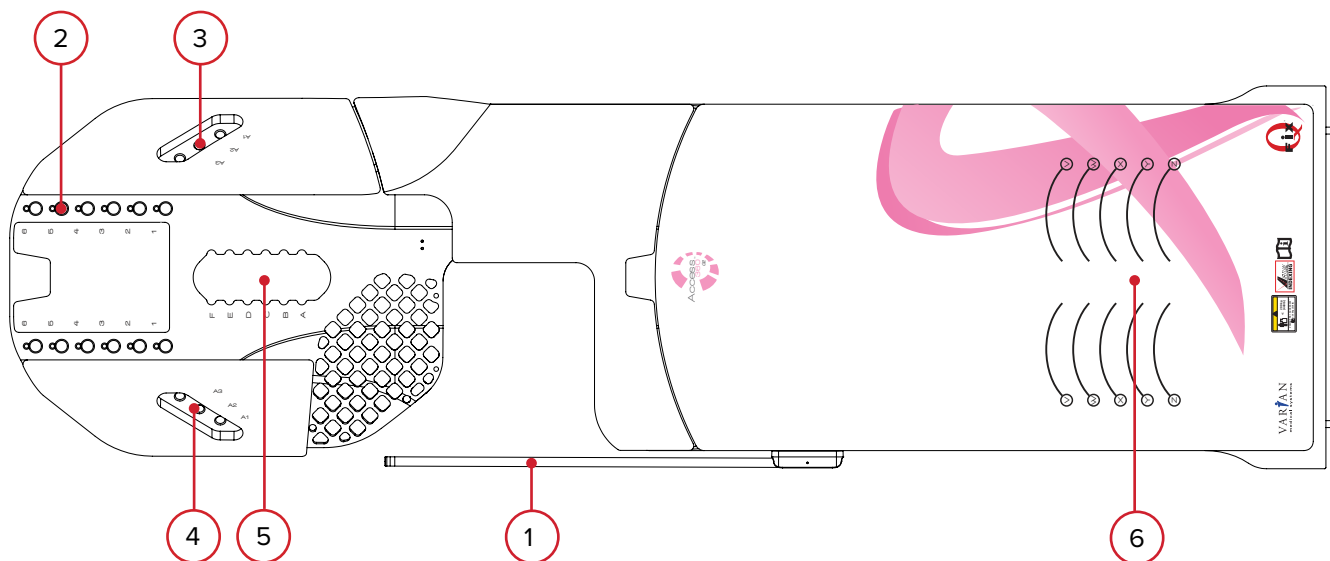

Venstre indsats

Højre indsats

! BEMÆRK ! Venstre indsats er vist oven for.

1. Ipsilateral skala:

2. Placering af dobbelthåndgreb (vælg én): 1 2 3 4 5 6 I/R

3. Håndgrebsstolpe, patient, højre (vælg én): A1 A2 A3 I/R

4. Håndgrebsstolpe, patient, venstre (vælg én): A1 A2 A3 I/R


5. Hovedstøtte anvendt: Ingen Bugleje Kontur Placering (vælg én): A B C D F

6. Knæplacering (vælg én): V W X Y ZF

7. Yderligere bemærkninger:

PATIENTOPSÆTNING

KVUE™ ACCESS 360™ G2-LEJETOPINDSATSER (FORTSAT)

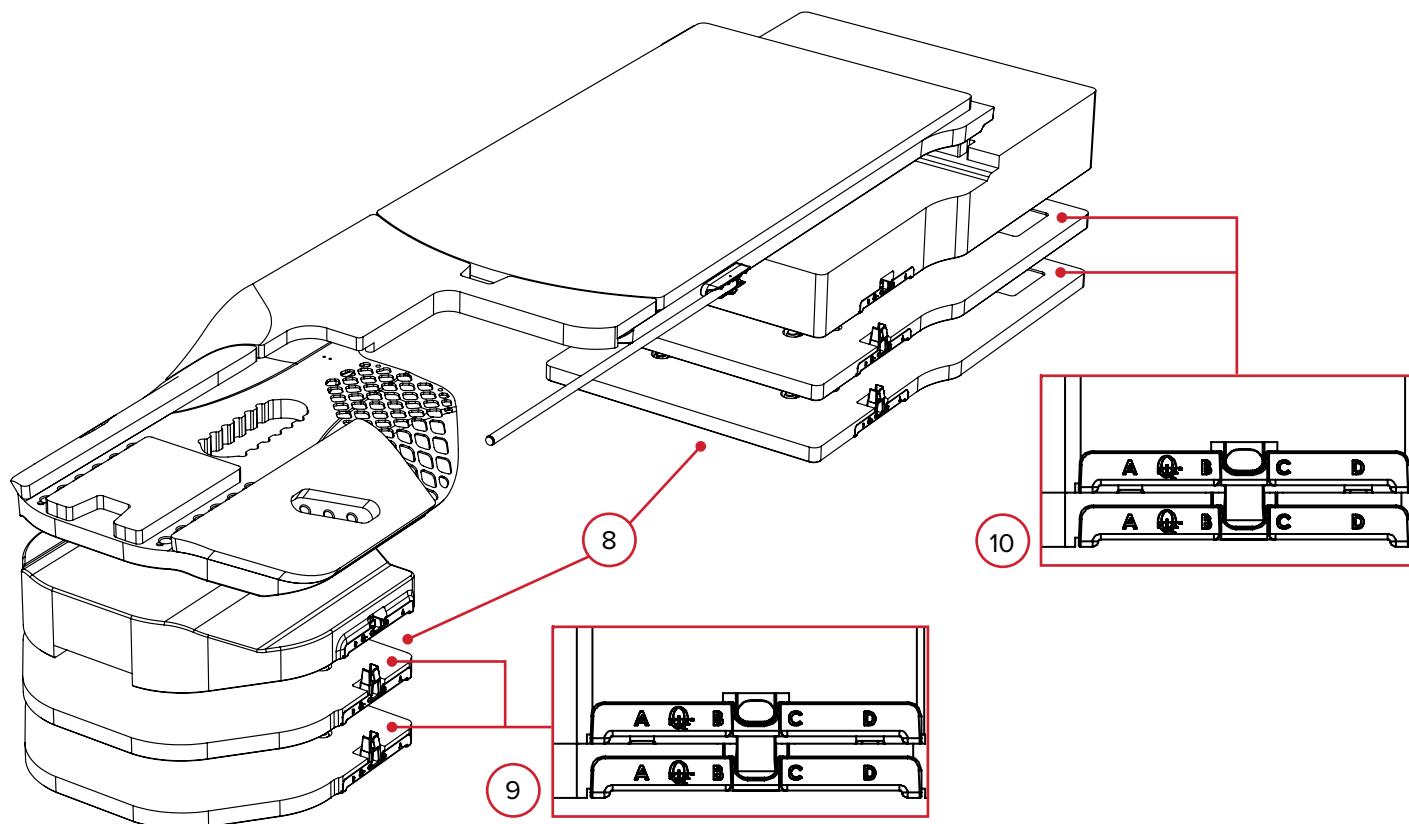


! BEMÆRK ! Venstre indsats er vist oven for.

T-hæveenheder og underlagsplader


8. Hvor mange sæt CT-hæveunderlagsplader anvendes (vælg én): **0** **1** **2** **3**
9. Øvre CT-hæveenhed – placering på lokaliseringsstang (vælg én): **A** **B** **C** **D**
9a) Placering af lokaliseringsstang på lejeplade:
10. Nedre CT-hæveenhed – placering på lokaliseringsstang (vælg én): **A** **B** **C** **D**
10a) Placering af lokaliseringsstang på lejeplade:
11. Yderligere bemærkninger:

RESERVEDELSLISTE

KVUE™ ACCESS 360™ LEJETOPINDSATSER

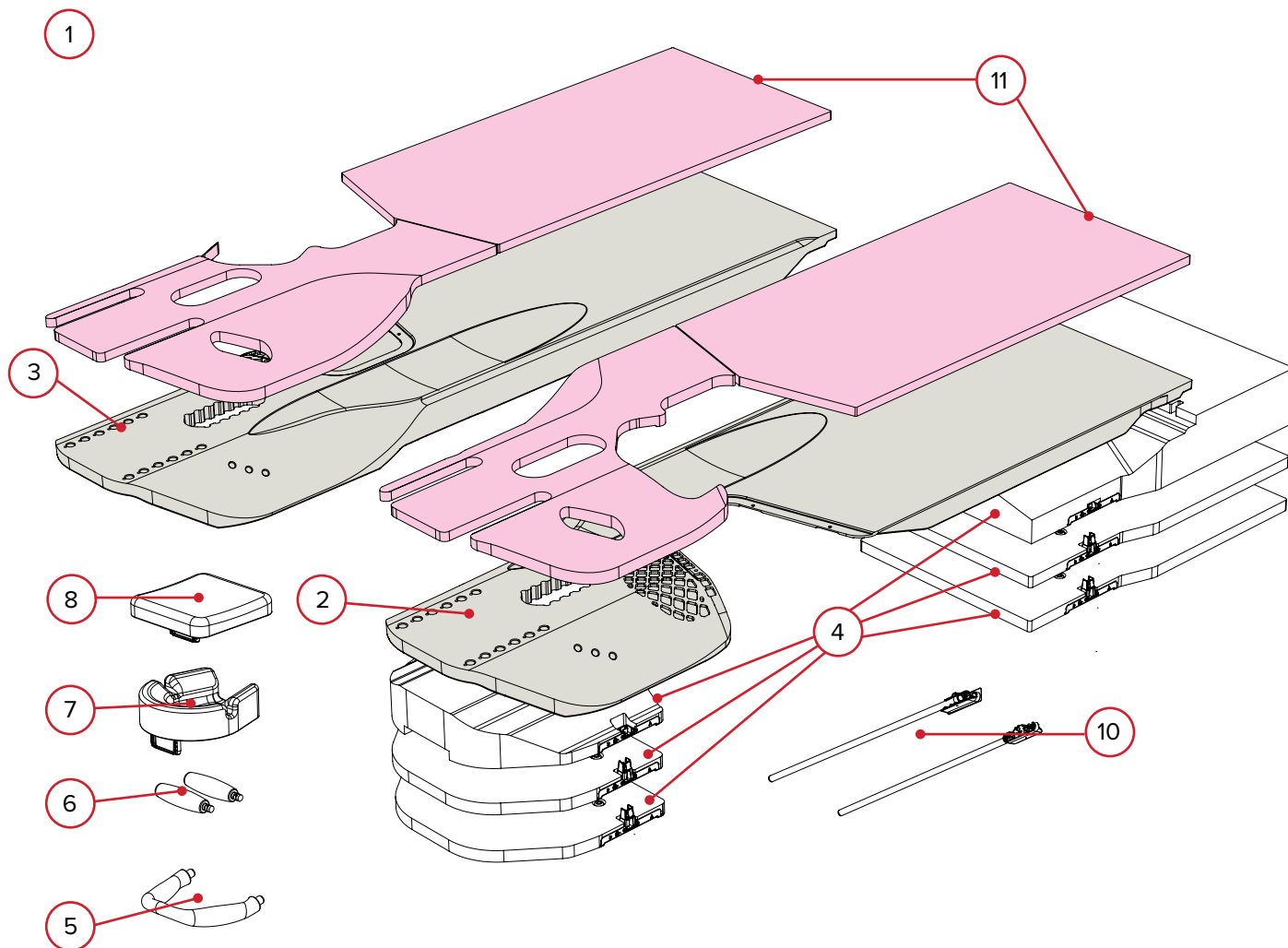

1. RT-4544KV – kVue Access 360 Package
2. RT-4544KV-01 – kVue Access 360 Couch Top Insert, venstre bryst
3. RT-4544KV-02 – kVue Access 360 Couch Top Insert, højre bryst
4. RT-4544KV-03 – kVue Access 360 CT Riser Set
5. RT-4544KV-04 – dobbeltgrebshåndtag
6. RT-4544KV-05 – håndgrebsstolpe
7. RT-4544KV-06 – hovedstøtte til bugleje
8. RT-4544KV-07 – konturhovedstøtte
9. RT-4551CART – opbevaringsvogn (ikke vist på diagram)
10. 8001846 – ipsilateral skala
11. 8001946 – Access 360 Pad Set

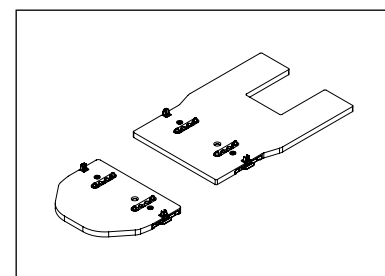


RT-4544KV-03A

kVue™ Access 360™
underlagspladesæt
(sælges separat)


RESERVEDELSLISTE

KVUE™ ACCESS 360™ G2-LEJETOPINDSATSER

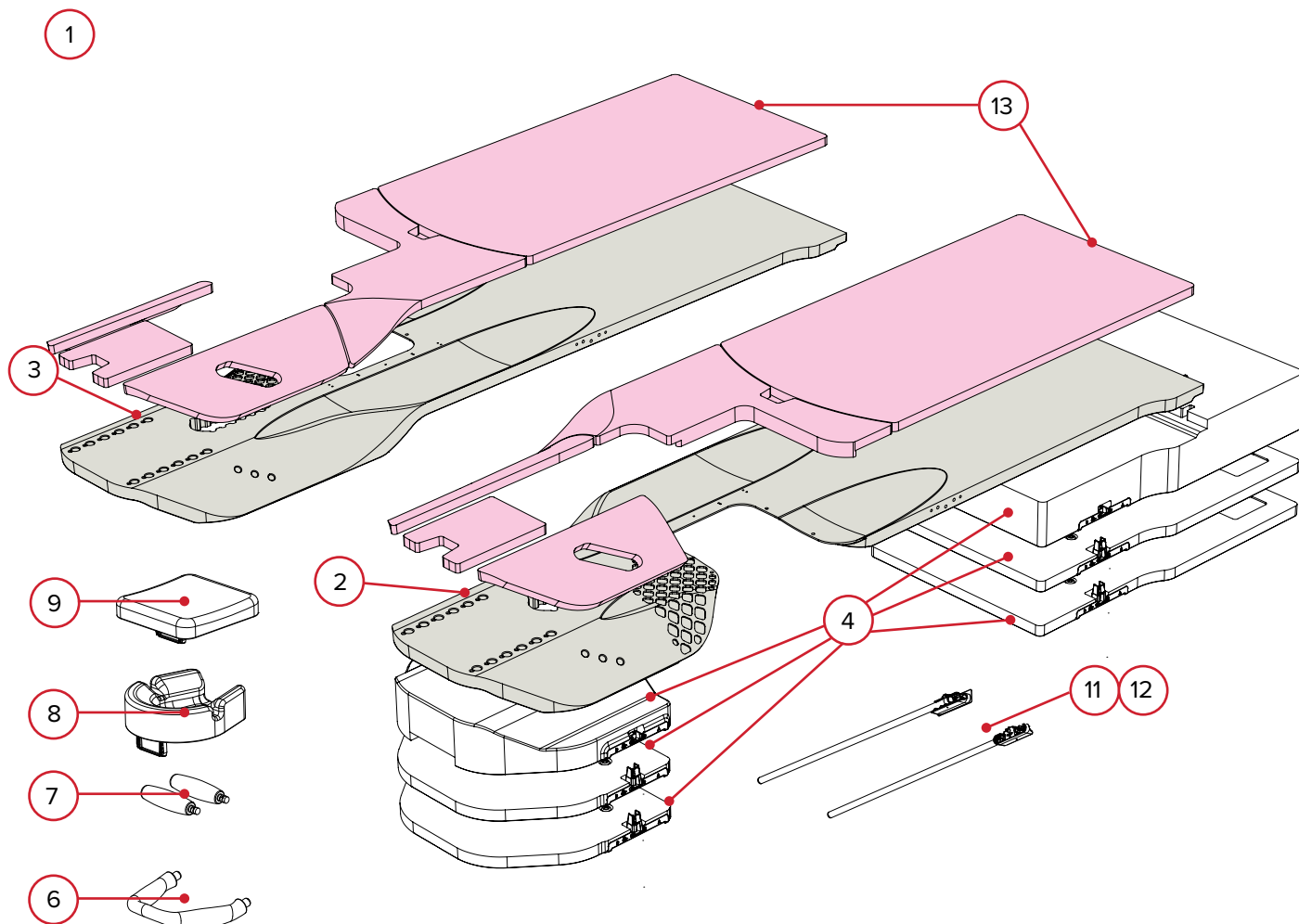

1. RT-4544KV-10 – kVue Access 360 G2 Package
2. RT-4544KV-11 – kVue Access 360 G2 Couch Top Insert, venstre bryst
3. RT-4544KV-12 – kVue Access 360 G2 Couch Top Insert, højre bryst
4. 8002581 – kVue Access 360 G2 CT Riser Set
5. 8002579 – kVue Access 360 G2-underlagspladesæt
6. RT-4544KV-04 – dobbeltgrebshåndtag
7. RT-4544KV-05 – håndgrebsstolpe
8. RT-4544KV-06 – hovedstøtte til bugleje
9. RT-4544KV-07 – konturhovedstøtte
10. RT-4551CART – opbevaringsvogn (ikke vist på diagram)
11. 8002601 – 40 cm ipsilateral skala (Udskiftning)
12. 8002602 – 48 cm ipsilateral skala (Tilbehør)
13. 8003038 – Access 360 G2 Pad Set

5

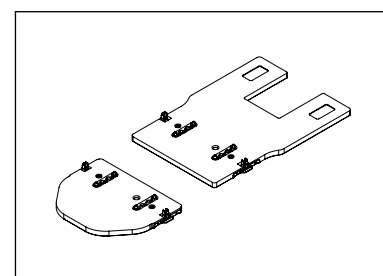

8002579

kVue™ Access 360™
G2-underlagspladesæt
(sælges separat)



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2002686_DA_E
2021-07