



positioning
patients for life.®

PRODUCTHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

RT-4544KV en RT-4544KV-10

kVue Access 360™ en

kVue Access 360™ G2

buikligging-inzetstuk voor tafelblad

met supraclaviculaire toegang





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Vervaardigd in de VS door Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Access 360, kVue en OneTouch zijn handelsmerken van Qfix.

Exact® is een gedeponeerd handelsmerk van Varian Medical Systems.

Cidex® is een gedeponeerd handelsmerk van Johnson and Johnson.

Clorox® is een gedeponeerd handelsmerk van The Clorox Company.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen	4
WAARSCHUWINGEN	4
ERNSTIGE INCIDENTEN	4
AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN	4
VERZWAKKING VAN DE BEHANDELINGSBUNDEL	4
NOMINALE BELASTING	4
WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN	5
BEOOGD GEBRUIK	7
FUNCTIES	8
BESCHRIJVING	8
BENODIGDE ACCESSOIRES	8
KVUE™ ACCESS 360™-ONDERDELEN	9
KVUE™ ACCESS 360™ G2-ONDERDELEN	10
COMPONENTEN	11
BEDIENINGSINSTRUCTIES	13
OPSTELLING	13
DE CT-RISERS EN CT-VULSTUKKEN AAN DE OVERLAY BEVESTIGEN	14
INSTALLATIE	16
POSITIONERING VAN DE PATIËNT	20
ONDERHOUD	22
HET SYSTEEM REINIGEN	22
HET SYSTEEM DESINFECTEREN	22
SPECIFICATIES	23
ACCESS 360™	23
ACCESS 360™ G2	24
PATIËNTOPSTELLING	25
KVUE™ ACCESS 360™-INZETSTUK VOOR TAFELBLAD	25
KVUE™ ACCESS 360™ G2-INZETSTUK VOOR TAFELBLAD	27
ONDERDELENLIJST	29
KVUE™ ACCESS 360™-INZETSTUKKEN VOOR TAFELBLAD	29
KVUE™ ACCESS 360™ G2-INZETSTUKKEN VOOR TAFELBLAD	30

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGEN

! WAARSCHUWING ! AANPASSING VAN DEZE APPARATUUR IS NIET TOEGESTAAN. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL EEN TE GROTE BELASTING ONDERVINDT, BESCHADIGD LIJKT OF NIET GOED FUNCTIONEERT, DIENT U HET HULPMIDDEL NIET LANGER TE GEBRUIKEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET QFIX VIA +1 484-720-6054 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! WAARSCHUWING ! DE ONETOUCH IS EEN PRECISIEMECHANISME EN IS ALLEEN BEDOELD VOOR GEBRUIK MET GOEDGEKEURDE QFIX KVUE-HULPMIDDELEN. NIET-GOEDGEKEURDE, NIET DOOR QFIX GEMAAKTE HULPMIDDELEN, DIE NIET ZIJN GEVALIDEERD DOOR QFIX ZIJN MOGELIJK NIET VEILIG VOOR GEBRUIK EN MAKEN DE GARANTIE ONGELDIG ALS ZE WORDEN GEBRUIKT.

! WAARSCHUWING ! SCHALEN OP DE KVUE ACCESS 360™ EN KVUE ACCESS 360™ G2 ZIJN UITSLUITEND TER REFERENTIE.

ERNSTIGE INCIDENTEN

Meld ernstige incidenten (bijvoorbeeld incidenten die dodelijk of ernstig letsel als gevolg (kunnen) hebben) bij zowel Qfix als de bevoegde autoriteit van uw land.

AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN

- De dubbele handgrepen en handgrepen zijn niet ontworpen om het gewicht van de patiënt te ondersteunen:
Gebruik de handgrepen **NIET** om de patiënt te positioneren. Gebruik de handvatten **NIET** om op of van het toestel te komen.
- Patiënten hebben mogelijk hulp nodig om op of van het toestel te komen.
- Vanwege de lengte van het toestel is het raadzaam om het toestel door twee personen te laten hanteren tijdens het plaatsen en verwijderen.
- Gebruik **NIET** meer dan 3 gestapelde CT-vulstukken tegelijk. Hierdoor kan het toestel instabiel worden.

VERZWAKKING VAN DE BEHANDELINGSBUNDEL

De structurele gebieden van de kVue Access 360™ en het kVue Access 360™ G2-tafelbladinzetstuk verzwakken een fotonbundel. De werkelijke verzwakking op basis van de opstelling moet worden gecontroleerd met uw specifieke apparatuur. Behandeling via een apparaat, zelfs een apparaat dat is gemaakt van samengesteld materiaal, leidt tot een verhoogde huiddosis.

NOMINALE BELASTING


Overschrijd **NIET** de gelijkmatig verdeelde belasting van 200 kg (440 lb.) of de maximale werklust van de tafelbasis, afhankelijk van welke minder is.

! OPMERKING ! In combinatie met het OEM-tafelonderstel is de nominale belasting de laagste van de twee veilige werkbelasting. De belasting van het kVue-tafelblad mag **NIET** hoger zijn dan de specificaties van de fabrikant van het oorspronkelijke tafelonderstel. Raadpleeg de productdocumentatie van de fabrikant.


ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN

Ga naar Qfix.com voor een lijst met symbolen en de bijbehorende definities.

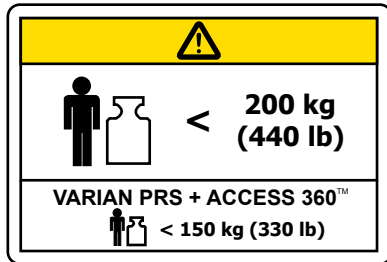


OF

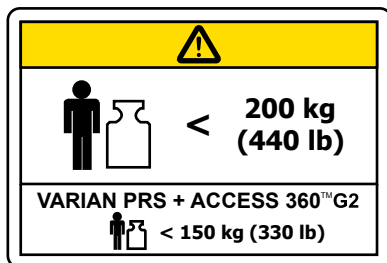

NOMINALE BELASTING

Overschrijd NIET het evenredig verdeelde gewicht van 200 kg (440 lb.) of de maximale veilige werklast van het kVue-inzetstuk of de basis van de tafel, afhankelijk van welke minder is.

Belast het apparaat NIET met meer dan 150 kg (330 lb.) gelijkmatig verdeelde belasting bij gebruik in combinatie met Varian PRS.

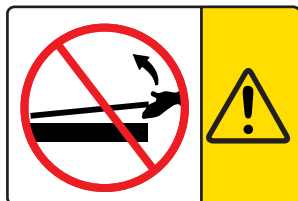

NIET OPTILLEN

! WAARSCHUWING ! TIL NOOIT HET UITEINDE VAN HET TAFELBLAD-INZETSTUK OP.

De bijbehorende pennen kunnen buigen of breken, waardoor het tafelblad onbruikbaar wordt.




"NO STEP" (NIET BETREDEN)-LIJN

Het gebied achter de borstuitsparing is ontworpen en getest om het bovenlichaam van de patiënt te dragen; het is NIET ontworpen om de volledige belasting van de patiënt te dragen.

Staan of zitten op het inzetstuk voor het tafelblad voorbij de borstuitsparing kan het inzetstuk voor het tafelblad beschadigen of letsel veroorzaken.


ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN

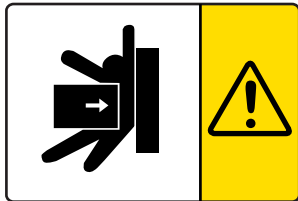

MOGELIJK LETSEL

Er bestaat kans op letsel tussen het inzetstuk voor het tafelblad en andere apparatuur in de behandelruimte. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het tafelblad om letsel te voorkomen.

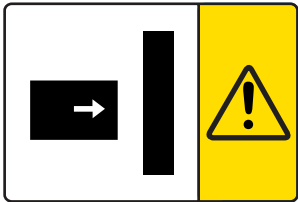

BOTSING MET GANTRY

De grote verscheidenheid aan bewegingen die door de tafelonderstellen en behandelkoppen kunnen worden verkregen, kan situaties veroorzaken waarin het inzetstuk voor het tafelblad in botsing kan komen met andere voorwerpen, waaronder de gantry. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de tafel of gantry om schade aan de apparatuur of letsel bij de patiënt te voorkomen.

BEOOGD GEBRUIK

Dit hulpmiddel is bedoeld voor het immobiliseren, positioneren en herpositioneren van patiënten die bestralingstherapie ondergaan.

! OPMERKING ! Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit product alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

PATIËTENDOELGROEPEN

Patiënten die bestralingstherapie of diagnostische beeldvormingsprocedures ondergaan.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De beoogde gebruiker van de producten is iemand die in aanmerking komt volgens de eisen van het regelgevingsgebied.

FUNCTIES

BESCHRIJVING

De kVue™ Access 360™ en kVue Access 360™ G2 zijn ontworpen voor behandeling van borstkanker voor zowel de linker- als de rechterborst, inclusief behandelingen van de hele borst, gedeeltelijke borst en versnelde borstbehandeling. Door de patiënt in buikligging te plaatsen, wordt de scheiding van de borst en belangrijke organen die risico lopen vergroot. Blootstelling aan het hart, de longen en het omliggende gezonde weefsel kan worden geminimaliseerd, met meer kans op:

- Gelijkmattigere dosistoediening
- Minder toxiciteit van de huid
- Verminderde ademhalingsbeweging

Het slanke, vrijdragende ontwerp biedt zowel schuine als niet-coplanare toegang, waardoor mogelijk een hogere dosis per fractie mogelijk is. Aangezien het bundelpad voornamelijk door de borst loopt met minimale interferentie van het tafelblad, kunnen artefacten en verstrooiing worden geminimaliseerd.

De Access Prone G2 (RT-4544-01) kan worden gebruikt als een CT/MR-simulatieapparaat voor de Access 360™ G2 (RT-4544KV-10).


! WAARSCHUWING ! ACCESS 360 (RT-4544KV) KAN NIET WORDEN GEBRUIKT ALS SIMULATIEAPPARAAT VOOR ANDERE PRODUCTEN DAN ZICHZELF OF ANDERE ACCESS 360 (RT-4544KV)-APPARATEN.

BENODIGDE ACCESSOIRES

CT-risers (voor simulatie)


FUNCTIES

KVUE™ ACCESS 360™-ONDERDELEN

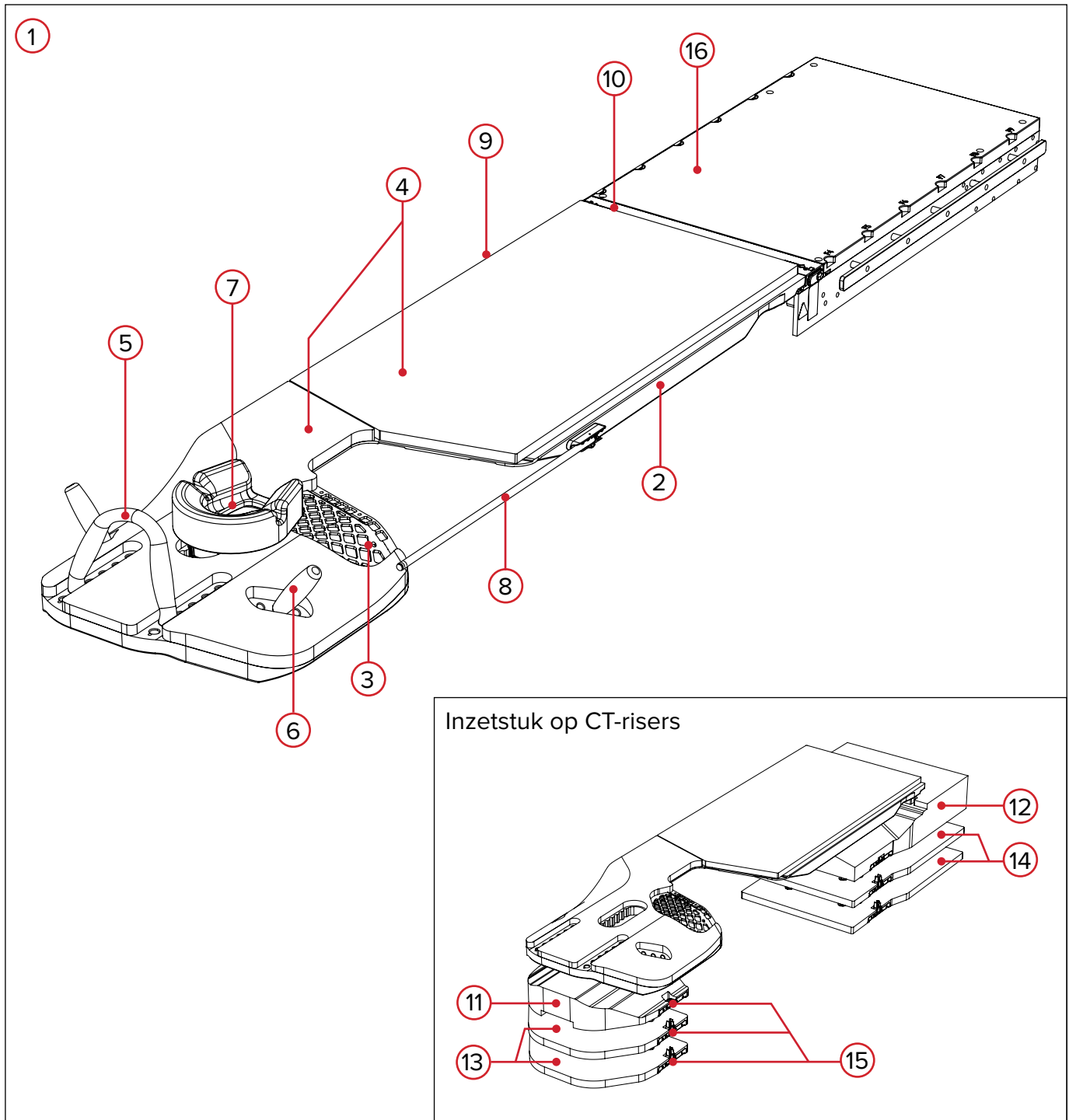

FUNCTIES

KVUE™ ACCESS 360™ G2-ONDERDELEN

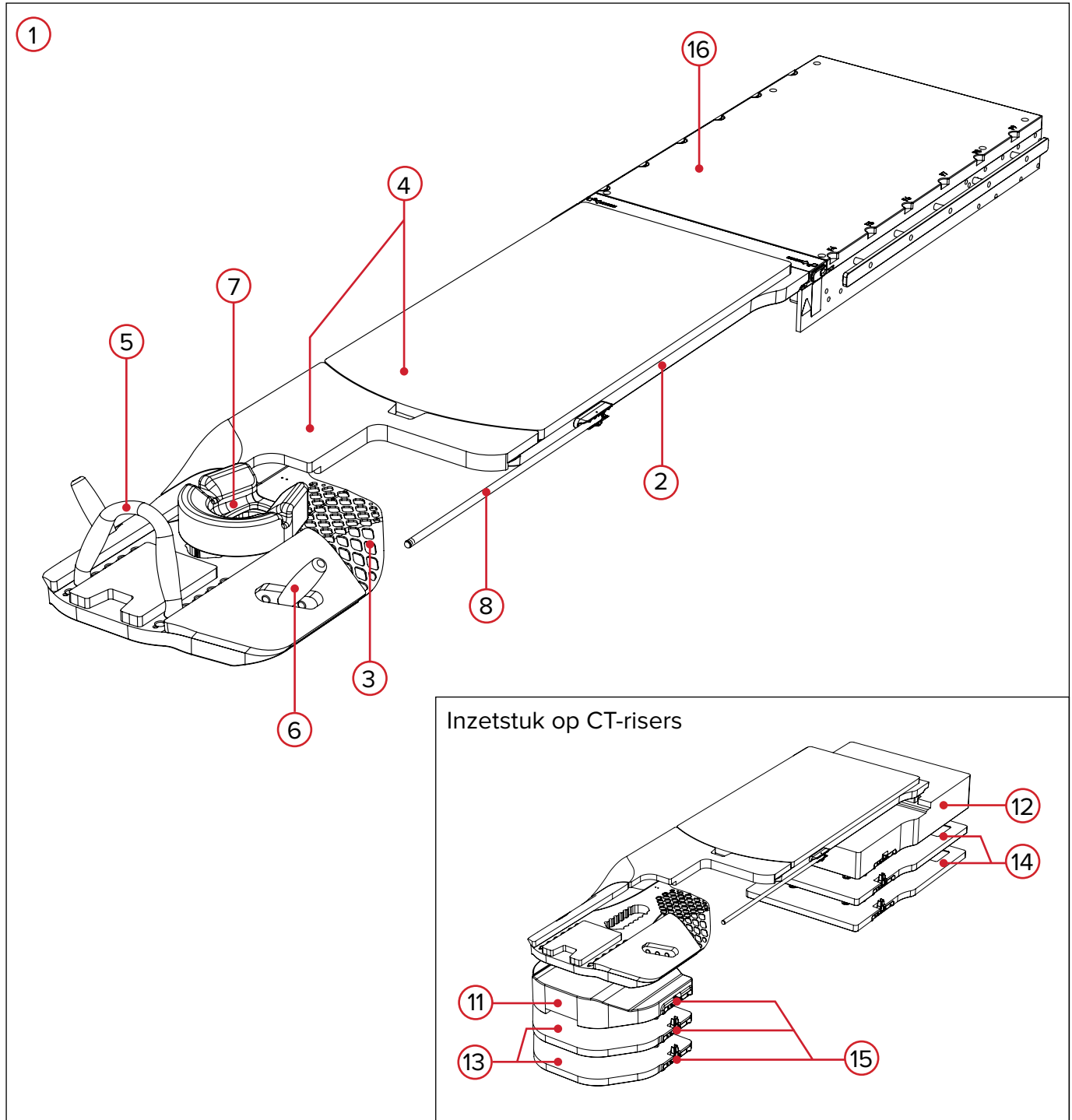

FUNCTIES

COMPONENTEN

1. KVUE™ ACCESS 360™ EN KVUE™ ACCESS 360™ G2 BUIKLIGGING-INZETSTUKSYSTEEM VOOR TAFELBLAD

De Access 360™ en Access 360™ G2 worden gebruikt als hulpmiddel bij het positioneren en opstellen van patiënten die radiotherapie van de borst en het sleutelbeengebied in buikligging ondergaan.

2. KVUE™ ACCESS 360™ EN KVUE™ ACCESS 360™ G2 BUIKLIGGING-INZETSTUK VOOR TAFELBLAD

Met het kVue-systeem kunt u snel en eenvoudig wisselen tussen de rechter en linker Access 360™ en Access 360™ G2 en andere kVue-tafelbladinzetstukken. Het inzetstuk bevat een raster voor behandeling van het sleutelbeengebied.

3. SUPRACLAVICULAIR RASTER

Het supraclaviculaire raster maakt behandeling van het sleutelbeengebied met lage verzwakking mogelijk.

4. KUSSENS

De kussens zijn voor het comfort van de patiënt, maar ze kunnen worden verwijderd en er kunnen vacuümkussens worden gebruikt. De kussens bieden ook extra grafische informatie over de positionering van de patiënt.

5. DUBBELE HANDGREEP

De dubbele handgreep is ergonomisch ontworpen om belasting op de pols van de patiënt te verminderen, in tegenstelling tot een standaard greep die met andere hulpmiddelen wordt gebruikt.

6. HANDGREEPSTIJL

De handgreepstijlen bieden grip voor patiënten met beperkte mobiliteit.

7. HOOFDSTEUNEN

Het systeem wordt geleverd met een hoofdsteen voor buikligging en contourligging. Beide kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de voorkeur van de opstelling. Ze kunnen op meerdere locaties worden geïndexeerd op het inzetstuk, afhankelijk van de lengte van de patiënt.

8. IPSILATERALE SCHAAL

De ipsilaterale schaal zwenkt en klikt boven op zijn plaats voor opstelling en zwaait naar achteren voor behandeling en opslag. De schaal kan worden gebruikt als uitlijnhulpmiddel. De nauwkeurigheid is ± 1 mm.

9. CONTRALATERALE SCHAAL

Access 360™: De contralaterale schaal bevindt zich langs de contralaterale zijde van het inzetstuk en kan worden gebruikt als uitlijnhulpmiddel. De nauwkeurigheid van de schaal is ± 1 mm (alleen beschikbaar op Access 360).

Access 360™ G2: Er zijn extra ipsilaterale schalen beschikbaar voor gebruik aan de contralaterale zijde (alleen Access 360 G2).

10. INFERIEURE SCHAAL

De inferieure schaal bevindt zich onder de kniemarkeringen op het inzetstuk en kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het uitlijnen. De nauwkeurigheid van de schaal is ± 1 mm (alleen beschikbaar op Access 360).

FUNCTIES

COMPONENTEN

11. SUPERIEURE CT-RISER

De superieure CT-riser wordt met behulp van een schuifstang naar de CT-overlay geïndexeerd. Het superieure uiteinde van het inzetstuk wordt 13 cm omhoog gebracht en wordt tijdens de simulatie gebruikt in combinatie met het inferieure CT-riser.

12. INFERIEURE CT-RISER

De inferieure CT-riser indexeert met behulp van een schuifstang naar de CT-overlay. Het inferieure uiteinde van het inzetstuk wordt 13 cm omhoog gebracht en wordt tijdens de simulatie gebruikt in combinatie met het inferieure CT-riser.

13. VULSTUK VOOR SUPERIEURE CT-RISER

Het CT-riser-vulstuk indexeert naar een schuifstang en verhoogt de bovenste CT-riser in stappen van 2,5 cm. Dit vulstuk kan vastklikken op een ander vulstuk van de superieure CT-riser en op de superieure CT-riser.

14. VULSTUK INFERIEURE CT-RISER

Het CT-riser-vulstuk indexeert naar een schuifstang en verhoogt de inferieure CT-riser in stappen van 2,5 cm. Dit vulstuk kan vastklikken op een ander vulstuk van de inferieure CT-riser en kan in de inferieure CT-riser worden geschroefd.

15. INDEXERINGSPLAAT

De CT-risers bevatten indexeringsplaten waarmee de CT-risers met behulp van een schuifstang op het tafelblad worden geplaatst. De indexeringsplaten op de CT-risers klikken in de indexeringsplaten op de CT-vulstukken voor hoogteaanpassing.

16. KVUE™-TAFELBLAD


Het kVue-tafelblad is het complete patiëntondersteuningssysteem, met uitzondering van het oorspronkelijke tafelonderstel. Het bestaat uit het basisframe (inclusief steunbalken), de interfaceplaat (indien nodig) en het juiste kVue-inzetstuk. (Raadpleeg voor meer informatie de kVue-installatie- en gebruikershandleiding)

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING

SCHUIFSTANG

De schuifstang heeft twee positioneringspennen die passen bij de meeste standaardaccessoires voor positionering. Plaats om te bevestigen een van de uiteinden van de positioneringsstang in de juiste verdelersleuven die compatibel zijn met Varian Exact® en klik deze vast. Om de stang te verwijderen of te verplaatsen, trekt u een van beide uiteinden van de stang omhoog.

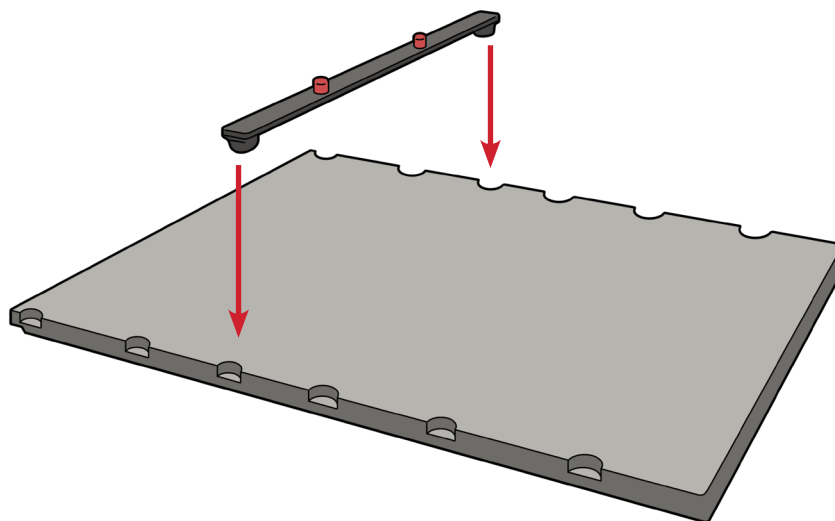


BEDIENINGSINSTRUCTIES


! OPMERKING ! Vanwege de lengte van het toestel is het raadzaam om het toestel door twee personen te laten hanteren tijdens het plaatsen en verwijderen.

DE CT-RISERS EN CT-VULSTUKKEN AAN DE OVERLAY BEVESTIGEN

1. Bevestig 2 schuifstangen 1260 mm (doorgaans 9 indexinkepingen) van elkaar en klik ze vast (afb. 1 en 2).

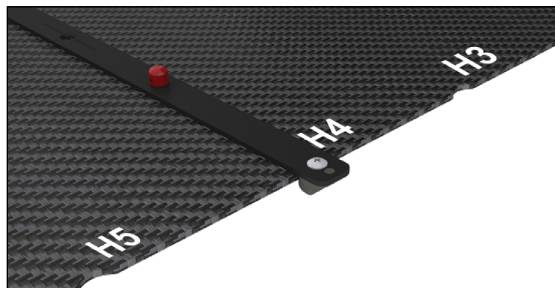


Afb. 1

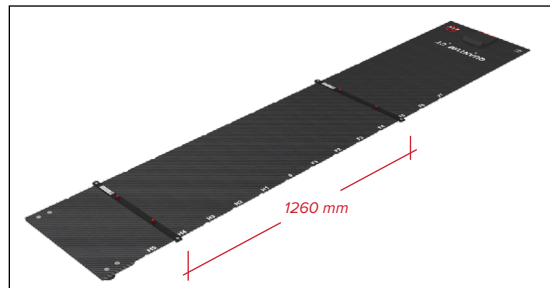


Afb. 2

2. Plaats de CT-risers en CT-vulstukken, afhankelijk van de beoogde opstelling, op de schuifstangen (afb. 3 en 4). Zorg ervoor dat de CT-risers en CT-vulstukken op dezelfde locaties worden geïndexeerd op zowel de onderste als de bovenste CT-riser A, B, C of D (afb. 5, 6 en 7). Vulstukken kunnen op elkaar worden gestapeld om de hoogte met stappen van 2,5 cm te vergroten.

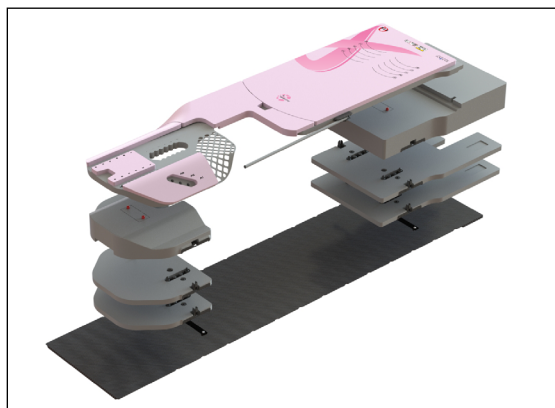


Afb. 3


OF

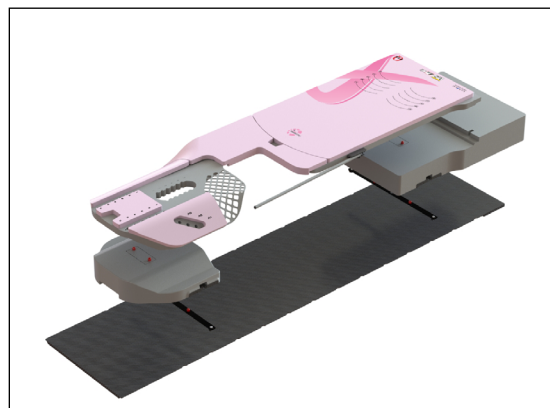


Afb. 4

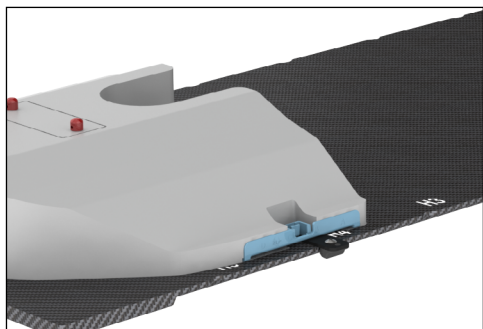

Afb. 5

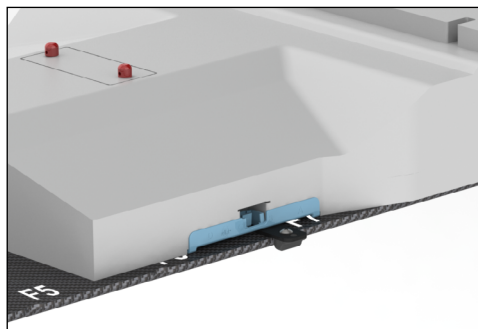


Afb. 6

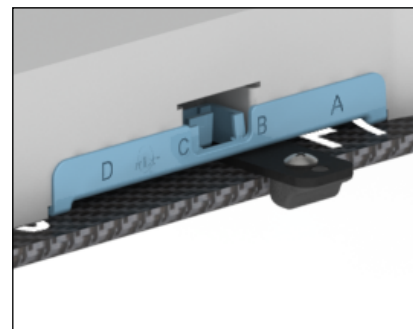

Afb. 7

BEDIENINGSINSTRUCTIES

3. Verwijder de Access 360™ of Access 360™ G2 om de hoogte van het apparaat te verlagen of de CT-risers en -vulstukken te verwijderen. Terwijl u op de vrijgaveknoppen aan weerszijden van de indexplaat drukt, tilt u de CT-riser of het CT-vulstuk van de CT-vulstuk eronder en verwijdt u deze (afb. 8).

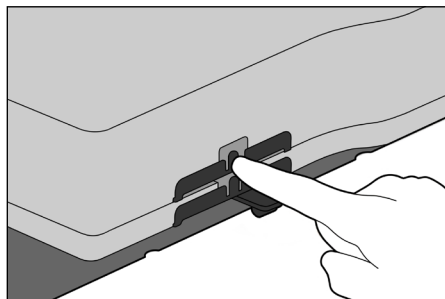

Afb. 8


BEDIENINGSINSTRUCTIES

INSTALLATIE

! OPMERKING ! Vanwege de lengte van het toestel is het raadzaam om het toestel door twee personen te laten hanteren tijdens het plaatsen en verwijderen.

INSTALLATIE VAN HET TAFELBLADINZETSTUK




1. Plaats het kVue-tafelbladinzetstuk boven op de steunbalken en lijn de twee bijbehorende pennen uit met de doelgaten in de OneTouch-vergrendeling.
2. Schuif vanaf het hoofdeinde van het kVue-tafelblad het inzetstuk voor het tafelblad rechtstreeks in de ontvangaten. U hoort een klik wanneer het inzetstuk voor het tafelblad op zijn plaats is vergrendeld. **ALLEEN** het groene oppervlak van de knop is zichtbaar wanneer deze correct is geïnstalleerd.

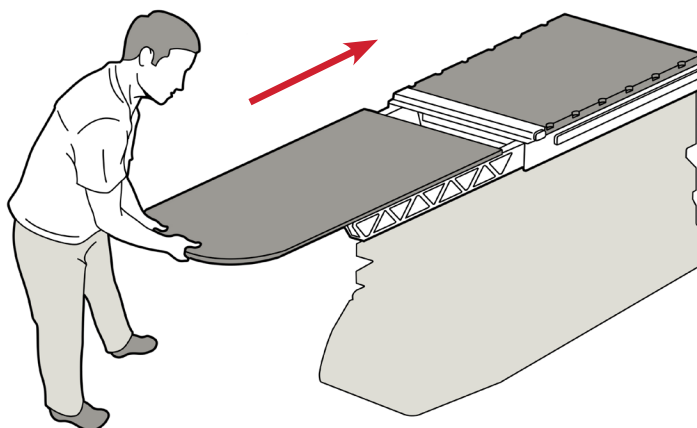

TAFELBLADINZETSTUK VERWIJDEREN

! TIL NOOIT HET UITEINDE VAN HET TAFELBLADINZETSTUK OP ! HOEWEL HET MECHANISME ZEER ROBUUST IS, KUNNEN DE BIJBEHORENDE PENNEN BUIGEN OF BREKEN, WAARDOOR HET TAFELBLAD ONBRUIKBAAR WORDT.

1. Draai de hendel linksom.
2. Trek aan de gedraaide hendel aan één kant van het tafelblad totdat het tafelbladinzetstuk loskomt. Dit kan met één hand worden gedaan.
3. Schuif het tafelbladinzetstuk weg van het tafelblad.

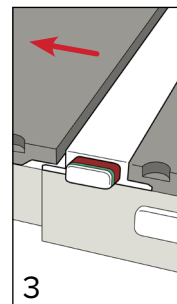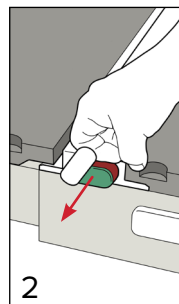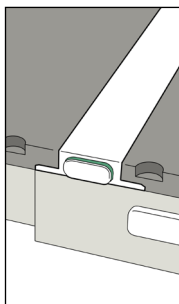


BEDIENINGSINSTRUCTIES


OPSTELLING

HOOFDSTEUN

1. Kies de hoofdsteun voor buikligging of de contourhoofdsteun die u voor de patiënt wilt gebruiken. (Hoofdsteun in buikligging hieronder weergegeven)
2. Steek het plastic uitlijnstuk in de juiste sleuf (A, B, C, D, E, F) aan de bovenzijde van het toestel (afb. 9 en 10).
3. Om de hoofdsteun te verwijderen of te verplaatsen, trekt u de hoofdsteun omhoog van het inzetstuk af.

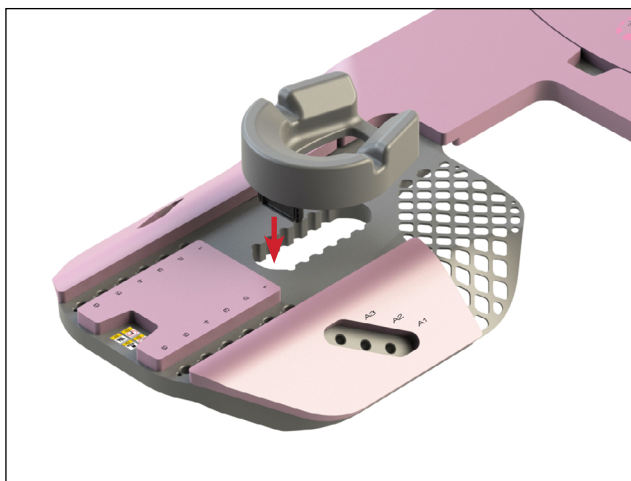

Afb. 9

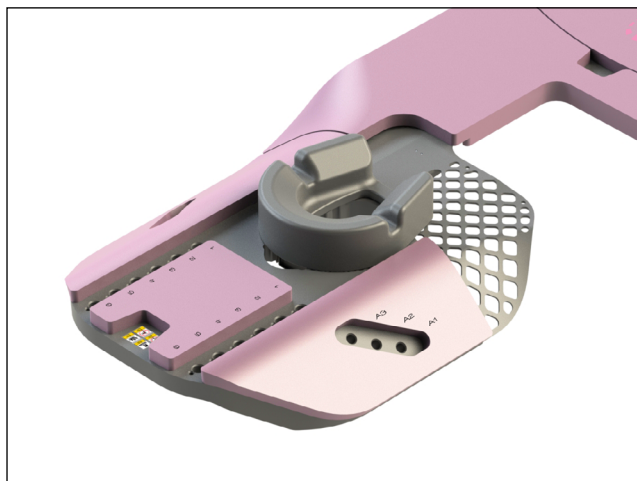

Afb. 10

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING

DUBBELE HANDGREEP

! WAARSCHUWING ! DE DUBBELE HANDGREPEN EN HANDGREPEN ZIJN NIET ONTWERPEN OM HET GEWICHT VAN DE PATIËNT TE ONDERSTEUNEN:


- Gebruik de handgrepen **NIET** om de patiënt te positioneren.
- Gebruik de handvatten **NIET** om op of van het toestel te komen.

1. Lijn de uiteinden van de dubbele handgreep uit met de bijbehorende gaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) aan het bovenste uiteinde van het inzetstuk.
2. Druk de dubbele handgreep omlaag in de gaten (afb. 11 en 12).


! OPMERKING ! De dubbele handgreep moet naar de patiënt toe gebogen worden, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding (afb. 10).

3. Om de dubbele handgreep te verwijderen of opnieuw te positioneren, trekt u deze omhoog totdat deze uit de openingen klikt (afb. 11 en 13).


! OPMERKING ! Er moet druk worden uitgeoefend op de bovenkant van het inzetstuk wanneer de handgrepen worden verwijderd, zodat het **NIET** omhoog komt. Hoewel het mechanisme zeer robuust is, kunnen de bijbehorende pennen buigen of breken, waardoor het tafelblad onbruikbaar wordt.

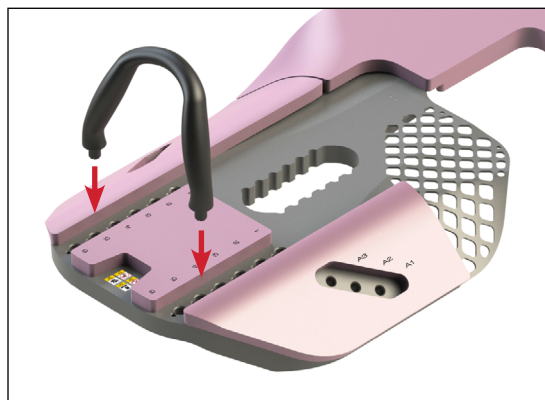

Afb. 11

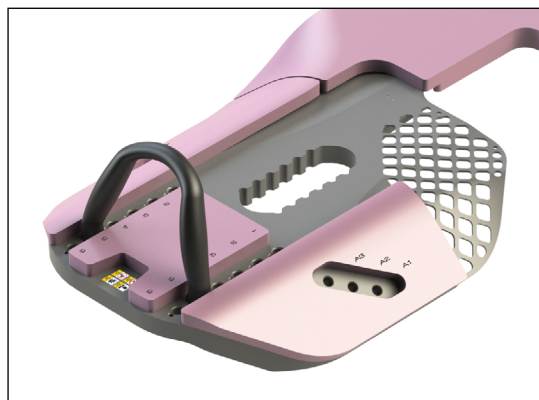

Afb. 12

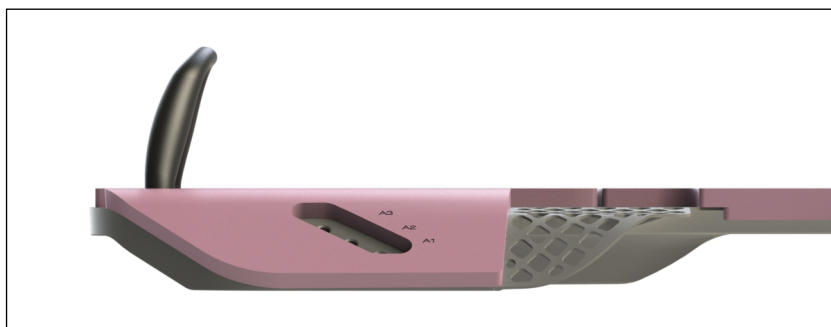


Afb. 13

BEDIENINGSINSTRUCTIES


OPSTELLING

HANDGREEPSTIJLEN

1. Steek de handgreepstijlen in de juiste opening (A1, A2, A3) aan de bovenkant van het inzetstuk (afb. 14).
2. Draai de handgreepstijlen in een van beide richtingen totdat de handgreep vastzit in het gat en vastklikt (afb. 15).
3. Om de handgreepstijlen te verwijderen, draait u de handgreep in tegengestelde richting totdat deze loskomt en trekt u de handgreep er vervolgens recht uit (afb. 14 en 15).

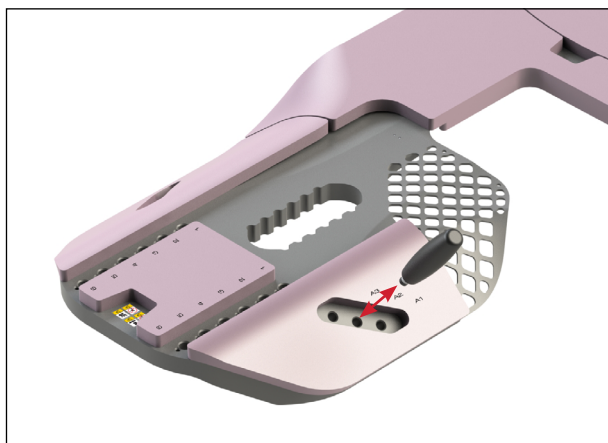

Afb. 14

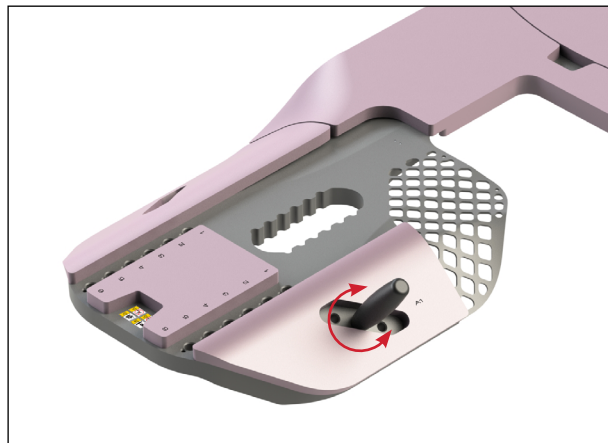

Afb. 15


BEDIENINGSINSTRUCTIES

POSITIONERING VAN DE PATIËNT


! OPMERKING ! Patiënten hebben mogelijk hulp nodig om op of van het toestel te komen. De onderstaande instructies zijn onze voorgestelde technieken, maar kunnen per kliniek verschillen.

OP EN VAN DE ACCESS 360™ EN ACCESS 360™ G2 AF KOMEN


1. Laat de tafel zakken of gebruik een opstapkruk om de patiënt te helpen op het inzetstuk te komen.
2. Zodra de patiënt op het inzetstuk is geplaatst, brengt u de knieën op één lijn met de juiste markeringen op het foam.
3. Laat de patiënt zijn/haar handen of ellebogen gebruiken om zijn/haar bovenlichaam in positie te brengen.
4. Laat de patiënt langzaam in de juiste positie zakken.
5. Zodra de patiënt in positie is gebracht, plaatst u het hoofd van de patiënt in de hoofdsteen en laat u de patiënt de handgrepen vastpakken.
6. Volg de stappen in omgekeerde volgorde om van het inzetstuk af te komen.

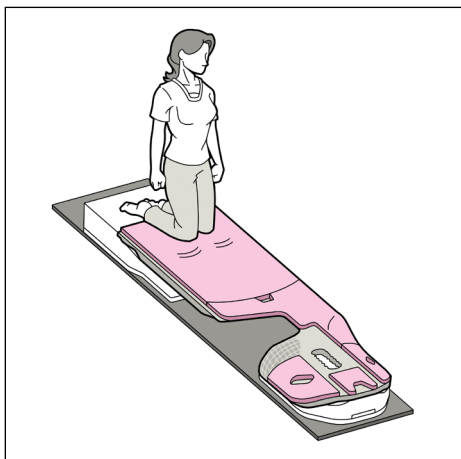

Afb. 16

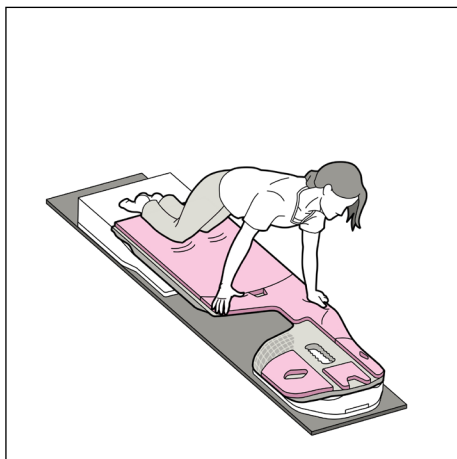

Afb. 17

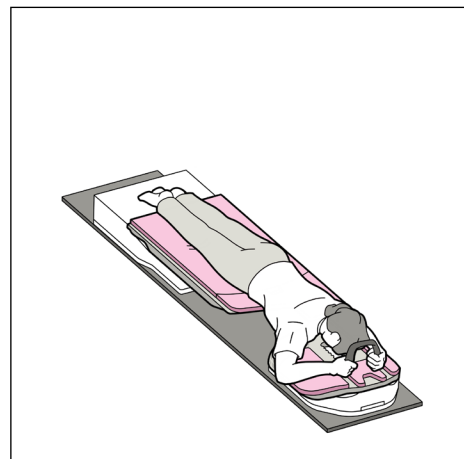

Afb. 18

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING

IPSILATERALE SCHAAL

! WAARSCHUWING ! DE IPSILATERALE SCHAAL IS NIET ONTWERPEN OM HET GEWICHT VAN EEN PATIËNT TE ONDERSTEUNEN.

1. Zodra de patiënt op zijn plaats is, zwaait u de ipsilaterale schaal naar boven totdat deze op zijn plaats vastklikt (afb. 20).
2. Lijn de patiënt uit.

! OPMERKING ! De schaal is aanwezig als uitlijnshulpmiddel; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de positie van de patiënt te bevestigen.

! OPMERKING ! De nauwkeurigheid van de schaal is getest tot ± 1 mm.

3. Zwenk de ipsilaterale schaal naar onderen, naar de opslagpositie, voorafgaand aan de behandeling en/of opslag (afb. 19 en 20).



Afb. 19: Opslagpositie



Afb. 20

ONDERHOUD

HET SYSTEEM REINIGEN

Het apparaat kan worden gereinigd met een mild niet-schurend reinigings- of desinfectiemiddel. Breng om te reinigen de oplossing aan op een schone doek en veeg het oppervlak af. Inspecteer het apparaat visueel, is het niet schoon, herhaal de voorgaande reinigingsstappen tot het visueel schoon is. Gebruik een schone met water bevochtigde doek om het apparaat af te vegen en achtergebleven reinigingsmiddel te verwijderen. Veeg het apparaat af met een schone, droge doek om het te drogen. Het volgende reinigingsmiddel is getest en geschikt bevonden om het apparaat mee te reinigen.

- Water
- Zeep en water

HET SYSTEEM DESINFECTEREN

Voor het desinfecteren van het oppervlak van het apparaat raadpleegt u de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

- Oplossing van 10% Clorox®-bleekmiddel
- Isopropylalcohol
- Een met 2,4% Cidex® geactiveerde dialdehydeoplossing


Spuit NIET rechtstreeks op het tafelblad of tafelbladinzetstuk en laat het niet in het basisframe stromen.

Plaats GEEN scherpe voorwerpen op het tafelblad of tafelbladinzetstuk.

SPECIFICATIES

ACCESS 360™


Gewichtslimiet: 200 kg (440 lb.) voor een gelijkmatig verdeelde lading.

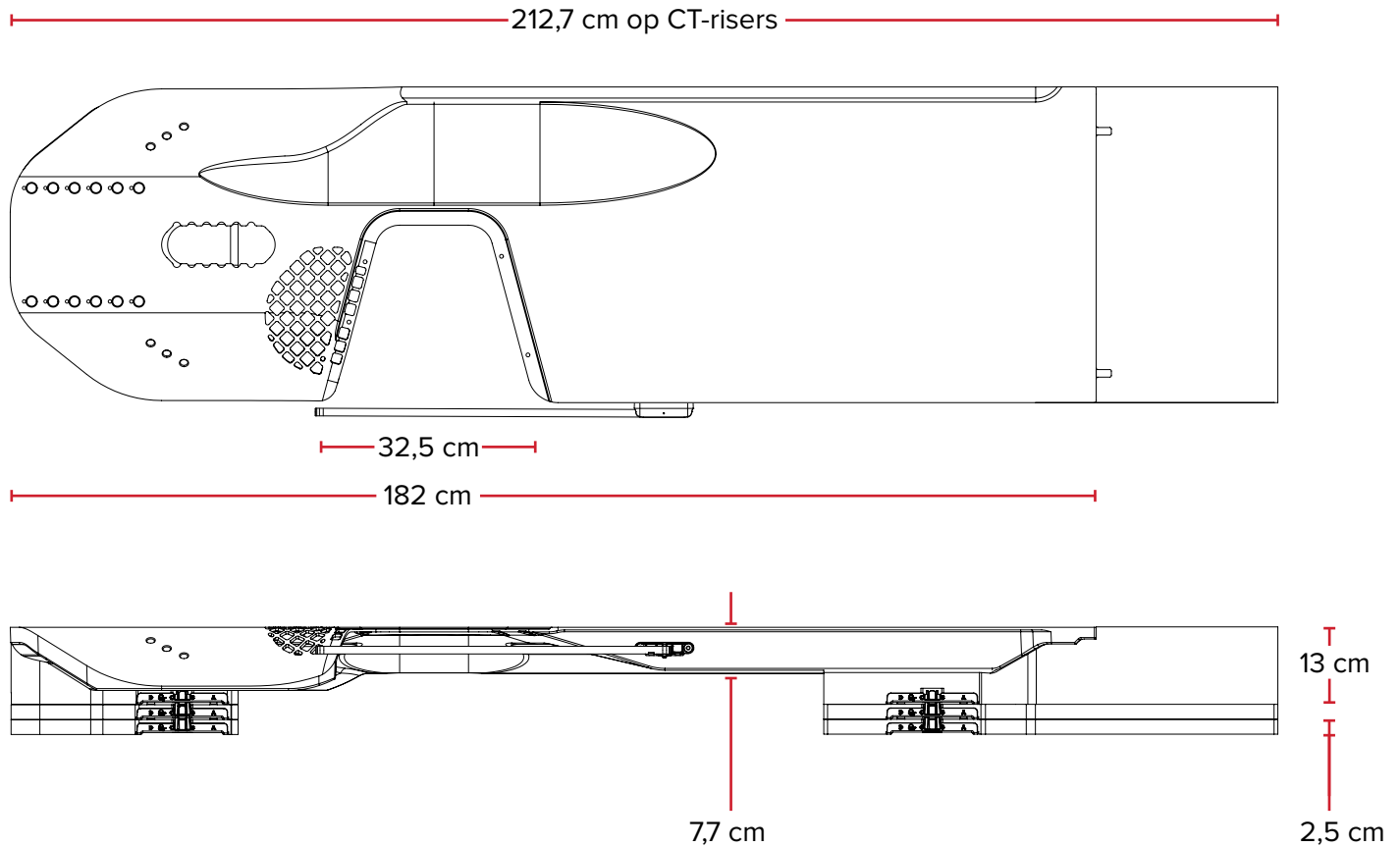

SPECIFICATIES

ACCESS 360™ G2

Gewichtslimiet: 200 kg (440 lb.) voor een gelijkmatig verdeelde lading.

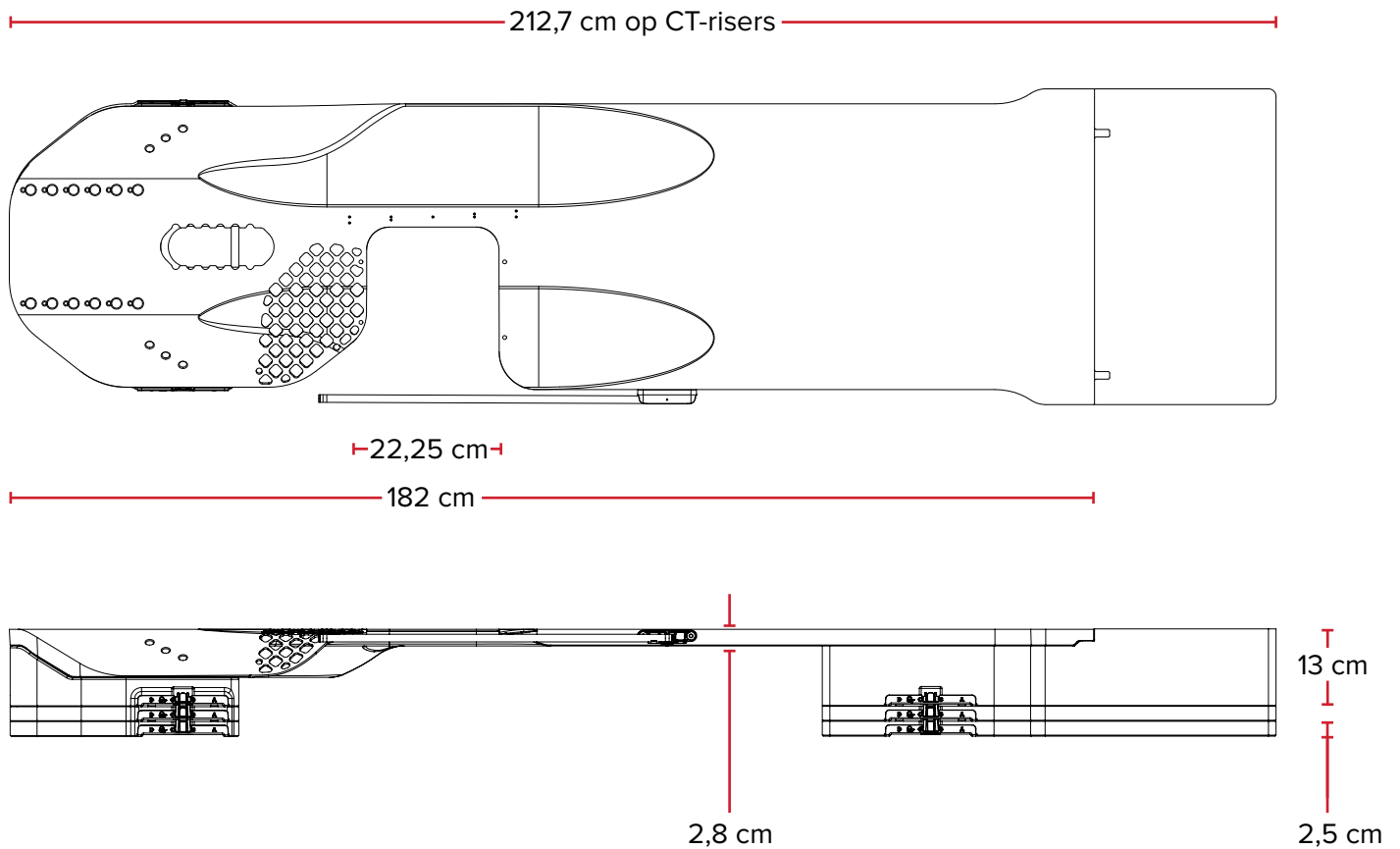

PATIËNTOPSTELLING

KVUE™ ACCESS 360™-INZETSTUK VOOR TAFELBLAD

Naam patiënt:


Patiënt-ID:

Opgesteld door:

Arts:

Datum:

Opmerkingen:

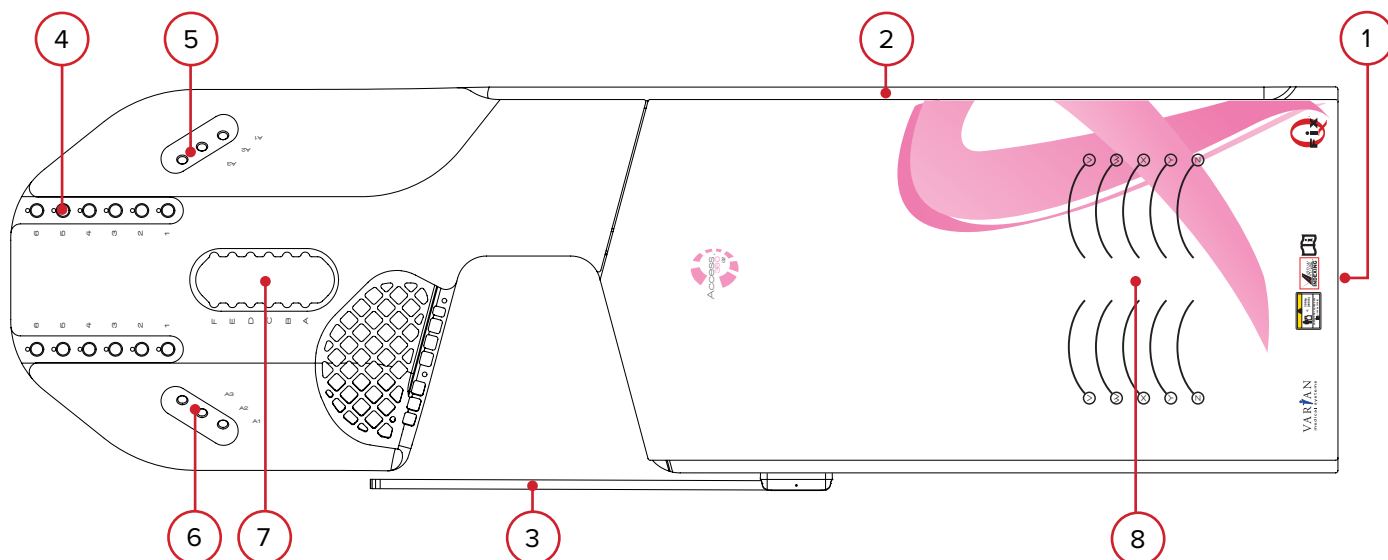

Inzetstuk links

Inzetstuk rechts

! OPMERKING ! Het inzetstuk links is hierboven afgebeeld.

1. Uitlijning onder:

2. Contralaterale schaal:

3. Ipsilaterale schaal:

4. Locatie dubbele handgreep (selecteer één optie): 1 2 3 4 5 6 N.v.t.

5. Handgreepstijl, rechterzijde patiënt (selecteer één optie): A1 A2 A3 N.v.t.

6. Handgreepstijl, linkerzijde patiënt (selecteer één optie): A1 A2 A3 N.v.t.


7. Gebruikte hoofdsteun: **Geen** **Buikligging** **Contour**
Locatie (selecteer één optie): **A** **B** **C** **D** **V**

8. Knielocatie (selecteer één optie): **V** **W** **X** **Y** **Z**

9. Aanvullende opmerkingen:

PATIËNTOPSTELLING

KVUE™ ACCESS 360™-INZETSTUK VOOR TAFELBLAD (VERVOLG)

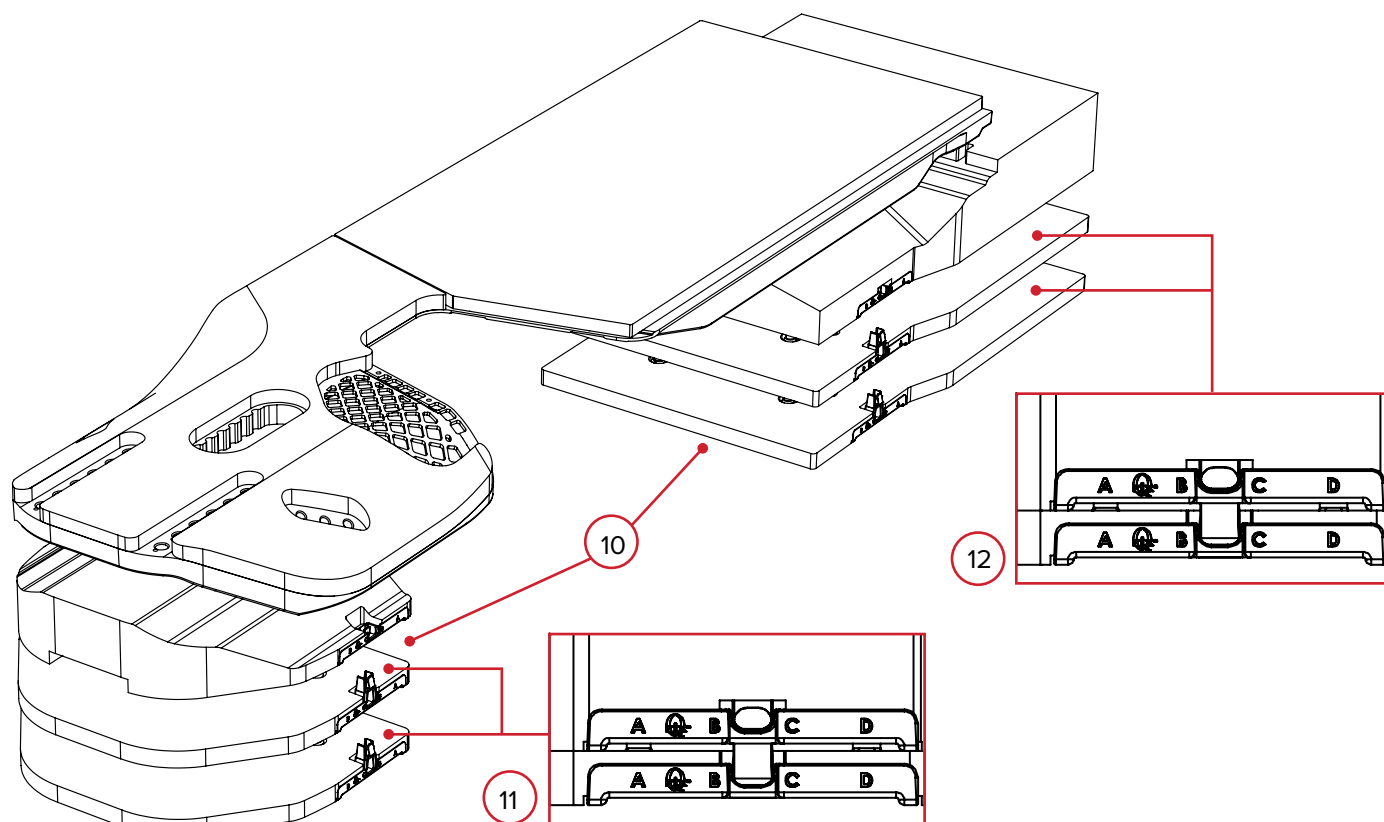

! OPMERKING ! Het inzetstuk links is hierboven afgebeeld.

CT-ophogers en vulstukken

10. Hoeveel sets CT-ophoogvulstukken worden gebruikt (selecteer één optie): **0** **1** **2** **3**

11. Bovenste CT-riser - Locatie op schuifstang (selecteer één optie): **A** **B** **C** **D**

11a) Locatie van de indexeerstang op het tafelblad:

12. Onderste CT-riser - Locatie op schuifstang (selecteer één optie): **A** **B** **C** **D**

12a) Locatie van de indexeerstang op het tafelblad:

13. Aanvullende opmerkingen:

PATIËNTOPSTELLING

KVUE™ ACCESS 360™ G2-INZETSTUK VOOR TAFELBLAD

Naam patiënt:


Patiënt-ID:

Opgesteld door:

Arts:

Datum:

Opmerkingen:

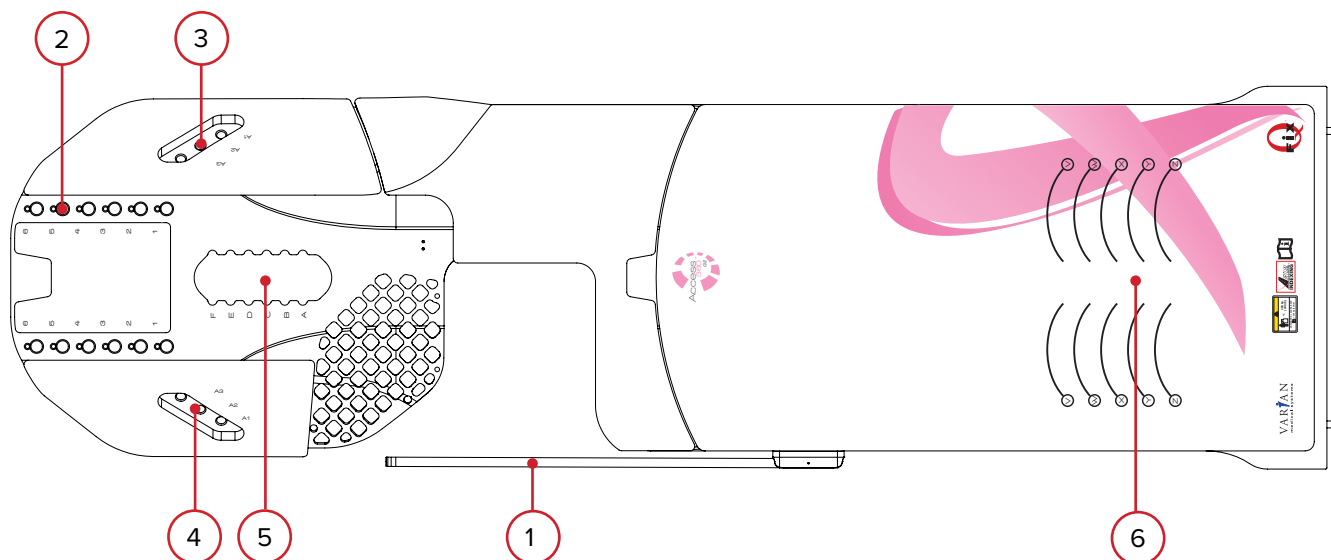

Inzetstuk links

Inzetstuk rechts

! OPMERKING ! Het inzetstuk links is hierboven afgebeeld.

1. Ipsilaterale schaal:

2. Locatie dubbele handgreep (selecteer één optie): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **N.v.t.**

3. Handgreepstijl, rechterzijde patiënt (selecteer één optie): **A1** **A2** **A3** **N.v.t.**

4. Handgreepstijl, linkerzijde patiënt (selecteer één optie): **A1** **A2** **A3** **N.v.t.**


5. Gebruikte hoofddeun: **Geen** **Buikligging** **Contour**
Locatie (selecteer één optie): **A** **B** **C** **D** **V**

6. Knielocatie (selecteer één optie): **V** **W** **X** **Y** **Z**

7. Aanvullende opmerkingen:

PATIËNTOPSTELLING

KVUE™ ACCESS 360™ G2-INZETSTUK VOOR TAFELBLAD (VERVOLG)

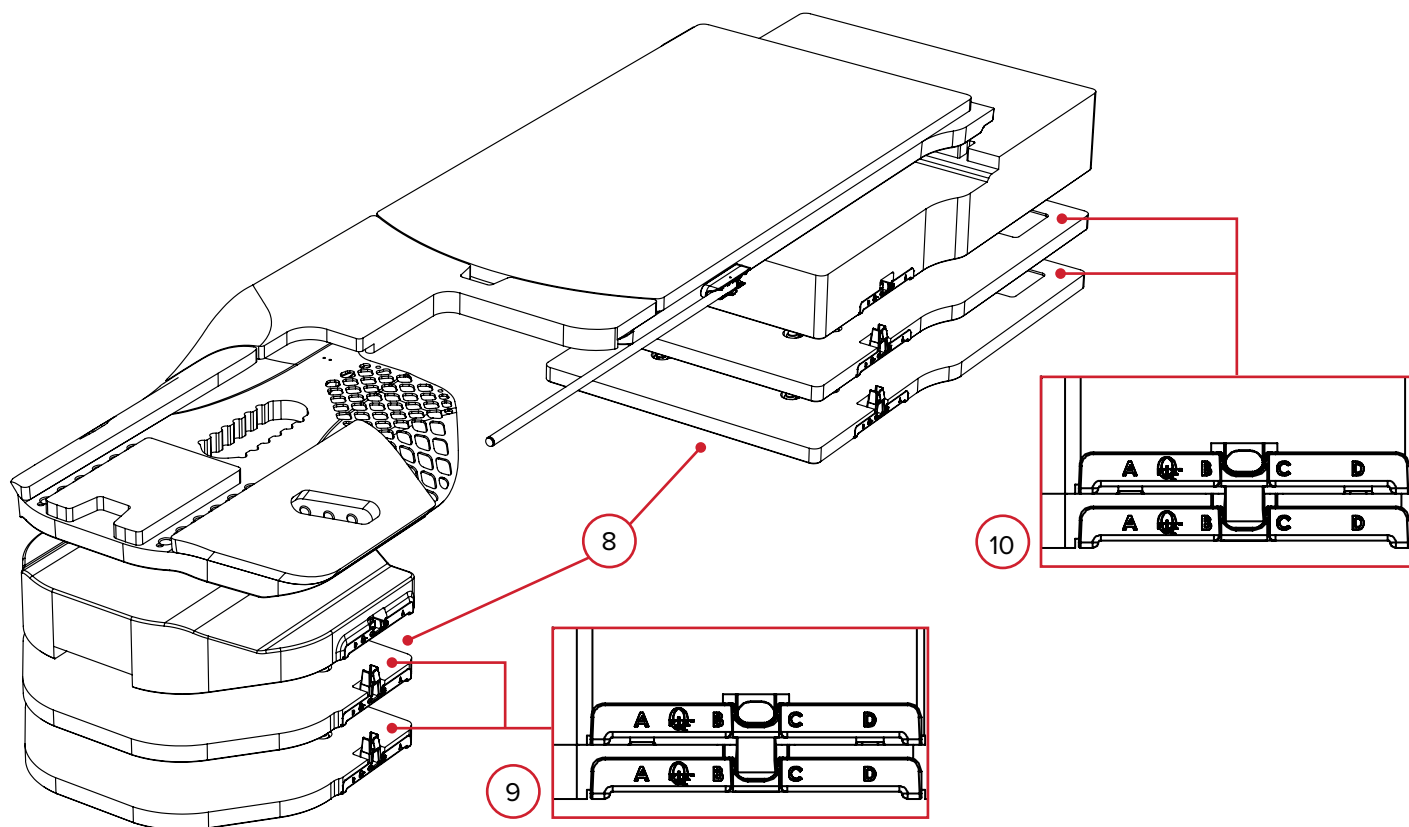


! OPMERKING ! Het inzetstuk links is hierboven afgebeeld.

CT-ophogers en vulstukken


8. Hoeveel sets vulstukken van de CT-riser worden gebruikt (omcirkel één optie): **0** **1** **2** **3**
9. Bovenste CT-riser - Locatie op schuifstang (omcirkel één optie): **A** **B** **C** **D**
9a) Locatie van de indexeerstang op het tafelblad:
10. Onderste CT-riser - Locatie op schuifstang (omcirkel één optie): **A** **B** **C** **D**
10a) Locatie van de indexeerstang op het tafelblad:
11. Aanvullende opmerkingen:

ONDERDELENLIJST

KVUE™ ACCESS 360™-INZETSTUKKEN VOOR TAFELBLAD

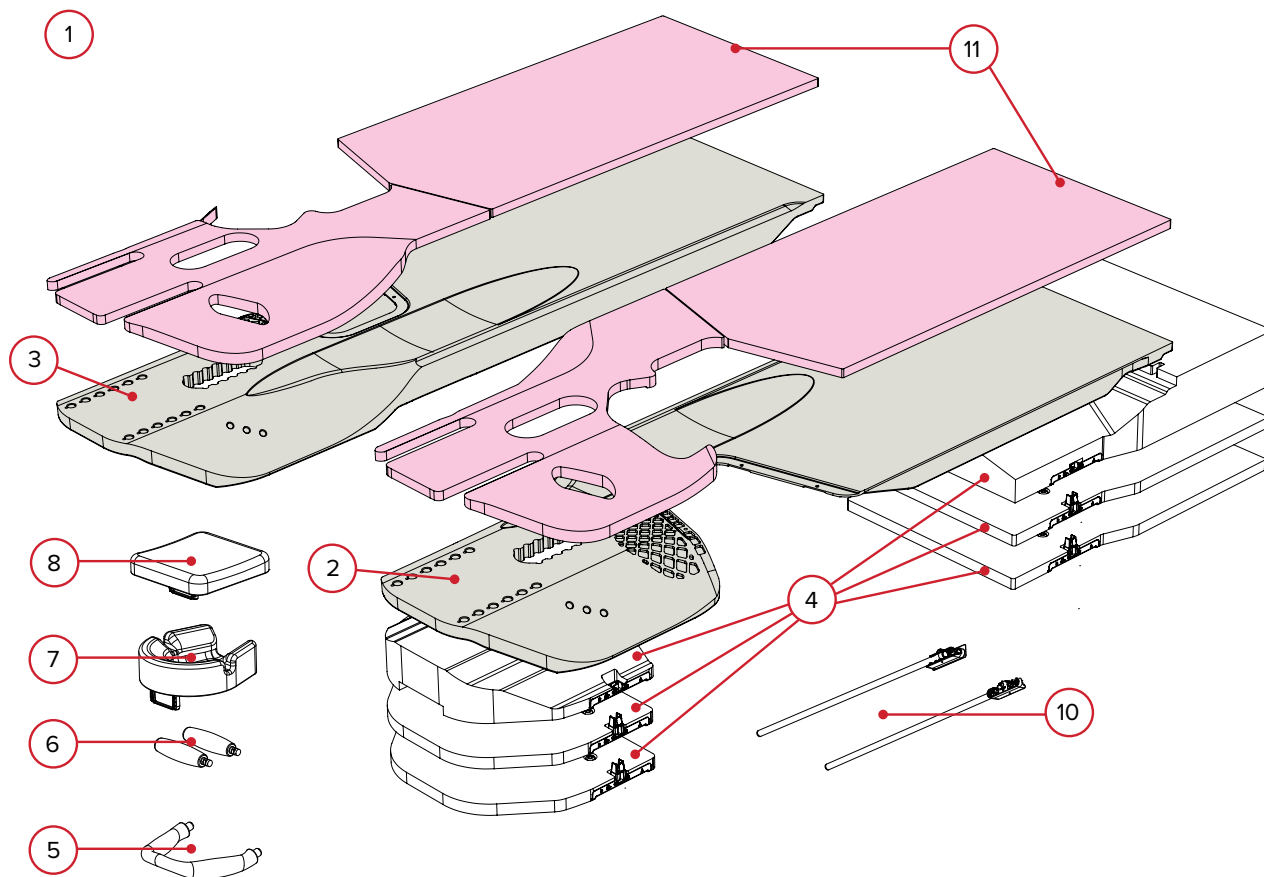

1. RT-4544KV - kVue Access 360-pakket
2. RT-4544KV-01 - kVue Access 360-inzetstuk voor tafelblad, linkerborst
3. RT-4544KV-02 - kVue Access 360-inzetstuk voor tafelblad, rechterborst
4. RT-4544KV-03 - kVue Access 360-CT-riserset
5. RT-4544KV-04 - Dubbele handgreep
6. RT-4544KV-05 - Handgreepstijl
7. RT-4544KV-06 - Hoofdsteun voor buikligging
8. RT-4544KV-07 - Hoofdsteun voor contourligging
9. RT-4551CART - Opslagwagen (niet afgebeeld)
10. 8001846 - Ipsilaterale schaal
11. 8001946 - Access 360-set pads

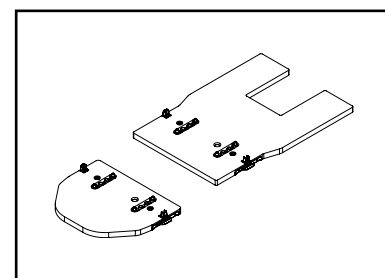


RT-4544KV-03A

kVue™ Access
360™-vulstukkenset
(afzonderlijk verkrijgbaar)


ONDERDELENLIJST

KVUE™ ACCESS 360™ G2-INZETSTUKKEN VOOR TAFELBLAD

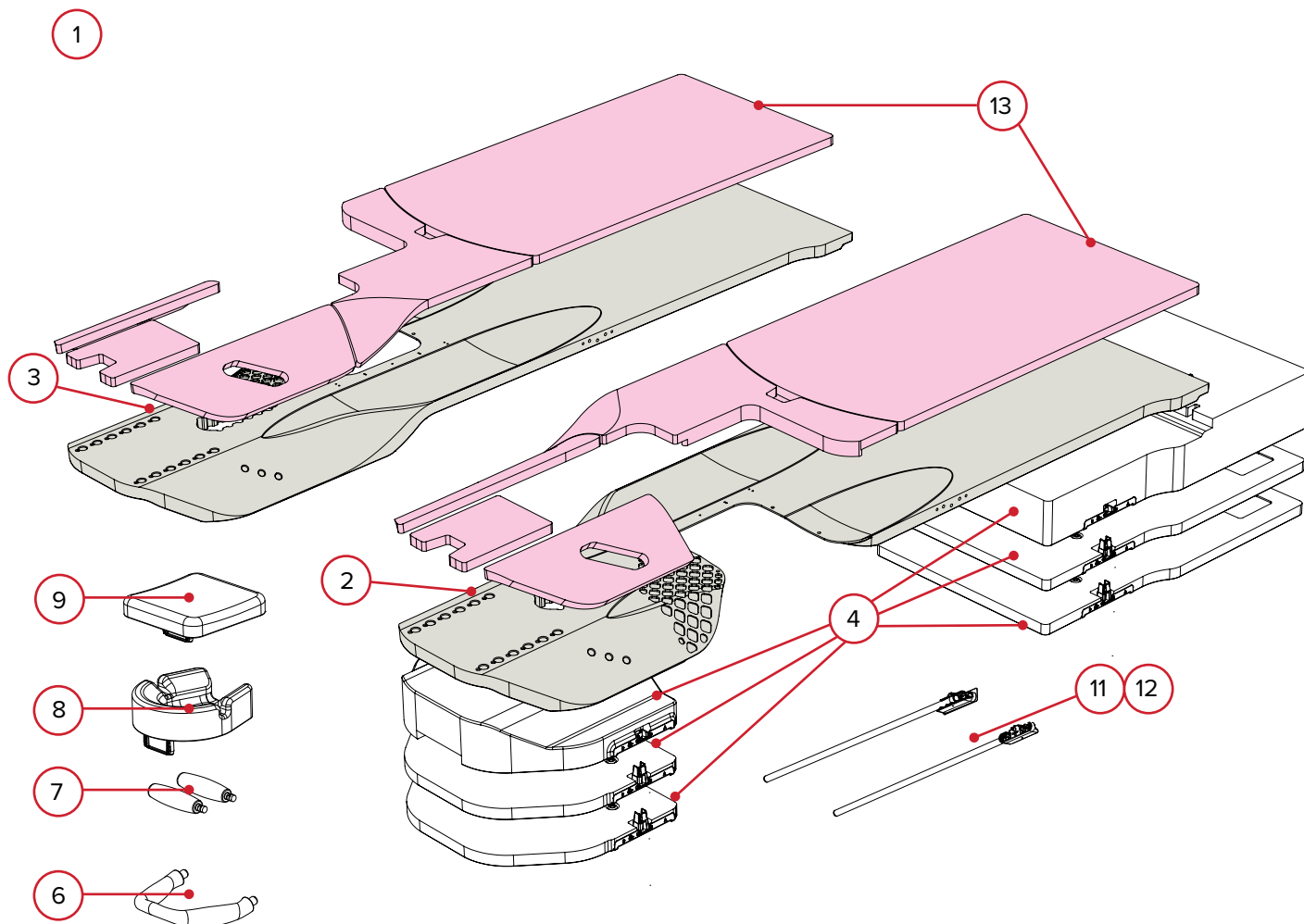

1. RT-4544KV-10 - kVue Access 360 G2-pakket
2. RT-4544KV-11 - kVue Access 360 G2-inzetstuk voor tafelblad, linkerborst
3. RT-4544KV-12 - kVue Access 360 G2-inzetstuk voor tafelblad, rechterborst
4. 8002581 - kVue Access 360 G2-CT-riser-set
5. 8002579 - kVue Access 360 G2-vulstukkenset
6. RT-4544KV-04 - Dubbele handgreep
7. RT-4544KV-05 - Handgreepstijl
8. RT-4544KV-06 - Hoofdsteun voor buikligging
9. RT-4544KV-07 - Hoofdsteun voor contourligging
10. RT-4551CART - Opslagwagen (niet afgebeeld)
11. 8002601 - Ipsilaterale schaal van 40 cm (vervanging)
12. 8002602 - Ipsilaterale schaal van 48 cm (accessoire)
13. 8003038 - Access 360 G2-set pads

5

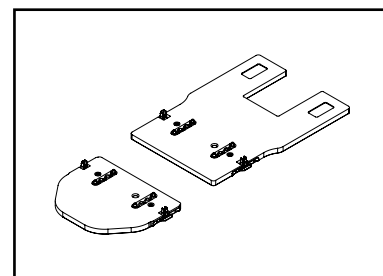

8002579

kVue™ Access 360™
G2-vulstukkenset (afzonderlijk
verkrijgbaar)



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2002686_NL_A
2023-04