



positioning
patients for life.®

製品ガイド および取扱説明書

Aquaplast RT™ および Fibreplast®
熱可塑性樹脂 および
IntegraBite™



 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom	
 米国での製造者名 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Registro Anvisa No:81300160001

Fibreplast® はQfix社の登録商標です。

Aquaplast RT および Assure および IntegraBite および Integrated Shim はQfix社の商標です。

Moldcare® はALCARE CO, LTD.社の登録商標です。

Clorox®はThe Clorox Companyの登録商標です。

Super Sani-Cloth®はPDI Healthcareの登録商標です。

Cidex®はJohnson & Johnsonの登録商標です。

AQUAPLAST RT™ およびFIBREPLAST™熱可塑性樹脂

用途

Aquaplast RTおよびFibreplastは、放射線治療を受けている患者の固定、位置決め、再配置を行うためのものです。

！注記！米国の連邦法により、本デバイスの販売または使用は、医師もしくは医師の指示に基づくものに制限されています。

対象患者

放射線療法または画像診断処置を受けている患者。

意図する使用者

製品の意図する使用者は、規制地域の要件に従って認定を受けた資格者です。

使用上の注意

- 本デバイスは、人の皮膚に接触すると軽度の感作を起こす場合があります。
- Aquaplast RTおよびFibreplast熱可塑性樹脂は、患者 1 人用として提供され、滅菌されていません。
- 熱可塑性樹脂マスクは、放射線治療照射を弱め、皮膚線量を増加します。計画と治療には、照射の減衰と皮膚線量の増加を考慮する必要があります。
- 記号の意味と説明はQfix.comに掲載されていますのでご参照ください。

！警告！放射線治療環境内での計画と治療に際しては、患者の位置決めの確認を完了させる必要があります。治療を実施する前に、標準セットアップ確認プロトコルに従って患者の位置決めを確認してください。

！警告！陽子線治療環境内での計画と治療に際しては、線量深度、エネルギー付与および移行域の影響を評価する必要があります。

！注記！ピンが押された状態でマスクを保管しないでください。

！注記！マスクはピンの部分で持ち上げないでください。

重大な有害事象

重大な有害事象（例えば、死亡または重傷をもたらす、またはその可能性がある事象）があれば必ず、Qfixと、設置した国の所管官庁の両方に報告してください。

MR安全性情報



MR 非臨床試験の結果、Aquaplast RTおよびFibreplast熱可塑性樹脂はMR対応であることが立証されています。Aquaplast RTおよびFibreplast熱可塑性樹脂は磁器共鳴環境下での使用が可能です。

AQUAPLAST RT™ およびFIBREPLAST™熱可塑性樹脂

情報および役立つヒント

- Aquaplast RTおよびFibreplastには、サイズと厚さを各種取り揃えております。熱可塑性樹脂の全製品および詳細についてはQfixカタログまたはwww.Qfix.comをご覧ください。
- Aquaplast RTおよびFibreplast熱可塑性樹脂は、起泡剤や真空クッションなどの市販の固定デバイスや位置決めデバイスに使用するよう適合させることができます。AquaplastおよびFibreplastはまた、ほとんどのカスタムメイドの頭部および頸部固定システムに併用できるよう修正することができます。
- マスクの作成中に患者の毛髪を覆うためシャワーキャップを使用できます。軟化した状態にあるとき、ヘアスプレーをかけた毛髪にマスクが付着することがあります。
- フィットと患者の快適性を最大限にするために:
 - 骨のとび出ている部分に10 x 10 cm (4 x 4インチ) ガーゼパッドを被せると、圧迫される部分ができるのを防止できます。
 - マスクの作成中にシム (または類似のデバイス) を患者の頭部の下に配置できます。シムは、治療時にマスクのフィットを調整するために追加または除去できます。
- マスクの成形を行う前に、開放創や病巣は病院のプロトコルに基づき包帯やプラスチックラップで被覆しておくことが必要です。
- 使用時以外は、熱や直射日光を避けてマスクを保管してください。
- Aquaplast RTおよびFibreplastは病院のプロトコルに基づいて廃棄してください。

Sフレームピンの識別

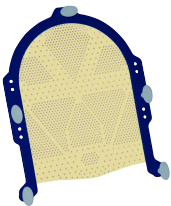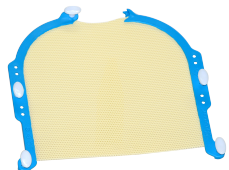フレームカラー	ピンカラー
 ダークブルーフレーム	 グレーピン
 ライトブルーフレーム	 ホワイトピン

RAPIDHEAT™ オープン

熱可塑性樹脂マスクの軟化

! 警告 ! RAPIDHEAT™ オープンの製品ガイドおよび取扱説明書に記載されているすべての警告、注意事項、および使用説明に従ってください。

! 警告 ! オープンラックは高温になることがあります! 取扱いにご注意ください。取扱う際は手を保護してください。

患者をシミュレータ室に搬入する前に、電源ボタン  を押してRapidHeat™ オープンの電源をオンにしてください。

手動モード

1. プログラムインジケータ (P01、P02など) が点滅を停止したら、上  または下 ボタンを押して希望する温度に設定します。小さな温度  アイコンの隣にあるライトが点滅します。
2. タイマー  ボタンを押します。小さなタイマー  アイコンの隣にあるライトが点滅します。上  または下  ボタンを押して、希望する加熱時間に設定します。
3. スタート/ストップ  を押して予熱サイクルを開始します。ディスプレイに、予熱を示す「PrH」が点滅します。「マスクの加熱」の項に進みます。

! 注記 ! 温度を変更する際は、小さな温度  アイコンの隣にあるライトが点滅していることを確認してください。加熱時間を変更する際は、小さなタイマー  アイコンの隣にあるライトが点滅していることを確認してください。

プログラムモード

1. プログラムインジケータ (P01、P02など) が点滅している間に、希望するプログラムが選択されるまで上  または下  ボタンを押します。
2. スタート/ストップ  を押して予熱サイクルを開始します。

! 注記 ! 画面にP01 (プログラム1)、P02 (プログラム2) などが点滅して、前回保存されたプログラムを示します。希望するプログラムを選択する前に画面の点滅が停止した場合には、P  ボタンを押し、希望するプログラムが選択されるまで上  または下  ボタンを押します。

RAPIDHEAT™ オープン

マスクの加熱

1. オープンの予熱サイクルが完了し、熱可塑性樹脂マスクを加熱する準備ができたならオープンがビープ音を鳴らし、画面に「PrH READY」と表示されます。
 2. Aquaplast RTまたはFibreplastマスクをメッシュライナーの上に載せます。
 3. メッシュライナーを転写シートとして使用し、メッシュライナーをオープンラックの上に載せます。
- ！ 注記！**マスクフレームの下縁をオープンの背面方向に向けて配置し、オープンラックの後縁に合わせてください。マスクのヘッドはオープン前面にあるオープンラックの前縁に合わせてください。
4. オープンドアが閉じたらスタート/ストップ (START/STOP) を押すと、タイマーがカウントダウンを開始します。
 - ・ 軟化サイクル中のオープンチャンバーの実測温度は (TEMP) ボタンを一回押すと確認できます。
 - ・ オープン温度を変更するには、希望する温度に達するまで上 (▲) または下 (▼) ボタンを押します。
 - ・ カウントダウンタイマーを調整するには、タイマー (T) ボタンのあとに上 (▲) または下 (▼) ボタンを押して、希望する加熱時間を再設定します。
 - ・ ランプ (LAMP) ボタンを押すとオープン内部を照明できます。ライトは60秒間点灯します。
 - ・ 軟化処理中にオープンドアを開くとタイマーは一旦停止します。オープンドアを閉じるとタイマーはカウントダウンを再開します。
 5. タイマーがゼロに達するとオープンはビープ音を3回、その後は60秒毎に一回鳴らして、軟化サイクルが完了したことを示します。画面に「READY」と表示されます。メッシュライナーを転写シートとして使用し、マスクをオープンラックから取り出します。
 6. 患者に接触させる前に、患者の快適さのためにマスクが十分冷めていることを確認します。

Qfix社の熱可塑性樹脂マスクに推奨される加熱時間および温度

熱可塑性樹脂	加熱時間	加熱温度
Aquaplast RTおよびFibreplastマスク	3～11分間	74°C (165°F)

！警告！加熱が30分を超えないようにしてください。

水槽

熱可塑性樹脂マスクの軟化

！警告！水槽の製品ガイドおよび取扱説明書に記載されている警告、注意事項、および使用説明すべてに従ってください。

1. 患者をシミュレータ室に搬入する前に水槽のスイッチをオンにして、可塑性樹脂を覆う水が十分あることを確認します。
2. メッシュライナーを温水に入れ、その上にマスクを置きます。

Qfix社の熱可塑性樹脂マスクに推奨される加熱時間および温度

熱可塑性樹脂	加熱時間	加熱温度
Aquaplast RTマスク	2分間	70°–75°C (160°–170°F)
Fibreplastマスク	2分間	75°–80°C (165°–175°F)

！警告！マスクは30分を超えて水槽に漬けたままにしないようにしてください。

3. メッシュライナーを転写シートとして使用し、フレームを水から取り出して乾いたタオルで余分な水を拭き取ります。患者の快適さのために、マスクが乾いて十分冷めていることを確認してください。

！警告！フレームおよび熱可塑性樹脂材は高温になることがあります！取扱いにはご注意ください。患者が怪我をしないようにするため、患者に接触させる前に少し冷ましてください。

の成形方法

AQUAPLAST RTおよびFIBREPLASTの成形方法

1. 使用するデバイスに合わせて、適切な頭部サポートとMOLDCARE® オプションを使用します。

！注記！患者にマスクを被せる前に、使用するデバイスによっては材質をあらかじめ引き伸ばしておくとい場合があります。材質を予備伸張させることで、完成したマスクの穴のパターンがより均一になり、収縮の影響を少なくすることができます。Fibreplastを予備伸張させることは推奨されません。

2. UフレームまたはSフレームを事前伸張するには、マスクを片手で自分の腰に当てて持ち、約15 cm (6インチ) 手で引き伸ばします (図 1)。

3. 軟化したマスクを患者に被せる前に、テストして熱過ぎないことを確認します。

4. 患者顔面に対して45°の角度で熱可塑性樹脂を上方に傾け、熱可塑性樹脂の縁を患者の下顎の下に引っ掛けて開始します (図 2)。

！注記！使用するデバイスの種類によって手順が異なることがあります。

5. 熱可塑性樹脂を上方に15～20 cm (6～8インチ) 引き伸ばしてから、デバイスの上に戻します (図3)。

6. マスクをデバイスに固定します。

！注記！使用するデバイスの種類により、マスクの固定が異なります。

7. 指で優しく押さえ、患者の頭部の輪郭だけではなく鼻梁の周囲の輪郭にきちんと沿わせて成形を完成させます (図 4)。

8. マスクが完全に冷めるまで少なくとも10～15分間待ってから外します。できれば、マスクが冷め次第シミュレーションを開始し、シミュレーションが完了するまでマスクを外さないでください。

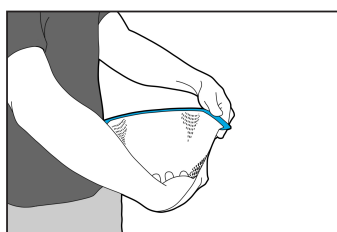


図1

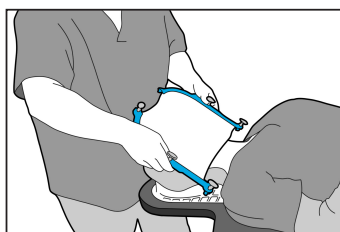


図2

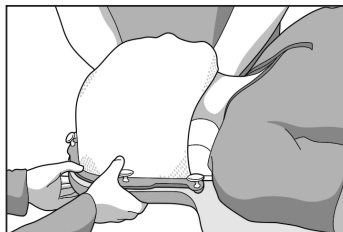


図3

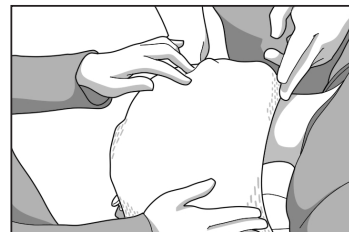


図4

VARIABLE PERF 熱可塑性樹脂の配置例

鼻あておよび顎を正しい位置にしてVariable Perf熱可塑性樹脂を患者の顔面に被せる方法を以下の例に示します。

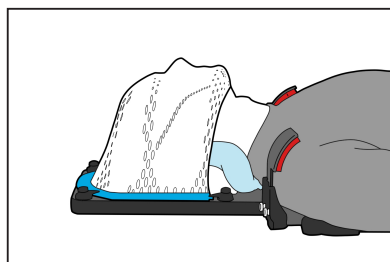


図5

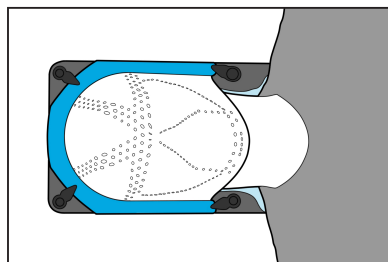


図6

の成形方法

頭部専用ASSURE™ オープンビューの成形方法

1. 使用するデバイスに合せて、適切な頭部サポートとMOLDCARE® オプションを使用します。
2. 軟化したマスクを患者に被せる前に、テストして熱過ぎないことを確認します。
3. 上胸部から始め、熱可塑性樹脂マスクを患者の上にスライドさせ、オープンビューの下方の境界を鼻の下に、上方の境界を眉の1 cm上に配置します。
4. マスクを固定する前に、別の人が両手を上下の境界に配置し、マスクをデバイスに固定する間、開口部を固定しておく必要があります。
5. 熱可塑性樹脂を15～20 cm (6～8インチ) 引き伸ばしてから、デバイスの上に戻します。
6. マスクをデバイスに固定します。

！注記！使用するデバイスの種類により、マスクの固定が異なります。

7. 剛性と安定性を高めるため、マスクの下部を折り返し、患者の顎の周囲になじませます。
8. 指で優しく押さえ、患者の頭部の輪郭にきちんと沿わせて成形を完成させます。
9. マスクが完全に冷めるまで少なくとも10～15分間待ってから外します。できれば、マスクが冷め次第シミュレーションを開始し、シミュレーションが完了するまでマスクを外さないでください。

頭部および肩用ASSUREオープンビューの成形方法

1. 頭部専用Assureオープンビューの項の手順1～3を参照してください。
2. マスクを固定する前に、別の人が両手で熱可塑性樹脂を胸部に固定します。
3. オープンビューの開口部を引き伸ばしすぎないように注意して、マスクをデバイスの上にゆっくり引き伸ばし、ロック用ピンを固定します。
4. 指で優しく押さえ、患者の頭部と肩の輪郭にきちんと沿わせて成形を完成させます。
5. マスクが完全に冷めるまで少なくとも10～15分間待ってから外します。できれば、マスクが冷め次第シミュレーションを開始し、シミュレーションが完了するまでマスクを外さないでください。

の成形方法

インテグレートッドシムを使用したマスクの成形方法

！注記！インテグレートッドシムのピンがフレームから抜けた場合は、マスクを廃棄してください。インテグレートッドシムマスクを再組立てしようとしないでください。

1. 前部熱可塑性樹脂マスクの各ピンを回し、シムを希望する高さ (推奨される高さは2 mm) にします (1目盛りは0.5 mm) (図7)。
2. 使用する熱可塑性樹脂マスクの種類に応じて、次のいずれかの項に従います。
 - Aquaplast RTおよびFibreplastの成形方法—手順1～5に従います。
 - 頭部専用Assureオープンビューの成形方法—手順1～4に従います。
 - 頭部および肩用Assureオープンビューの成形方法—手順1～3に従います。

！注記！前部マスクを固定する前に、Integrated Shims™ が望ましい高さに設定されていることを確認してください。

！警告！マスクを固定するときは、患者や使用者がマスクとデバイスの間に挟まれないように注意してください。

3. すべてのピンを押し込んで熱可塑性樹脂マスクを固定します。クリック音が聞こえたら、熱可塑性樹脂マスクが固定されたことがわかります。
4. 指で優しく押さえ、患者の頭部と肩の輪郭にきちんと沿わせて成形を完成させます。
5. マスクが完全に冷めるまで少なくとも10～15分間待ってから外します。できれば、マスクが冷め次第シミュレーションを開始し、シミュレーションが完了するまでマスクを外さないでください。

！注記！熱可塑性樹脂マスクに組み込まれているIntegrated Shim System™ は、マスクシステムを取り外すことなく高さの調整を可能にします。

- 患者が熱可塑性樹脂マスクを着用している間、または着用していないときでも、ピンを回転させて希望するシムの高さを設定することができます。シムは時計回りに回転すると高くなり、反時計回りに回転させると低くなります。
- シムの高さは、0.5 mm毎に調節できます。
- 各シムの高さは、個別に調整できます。

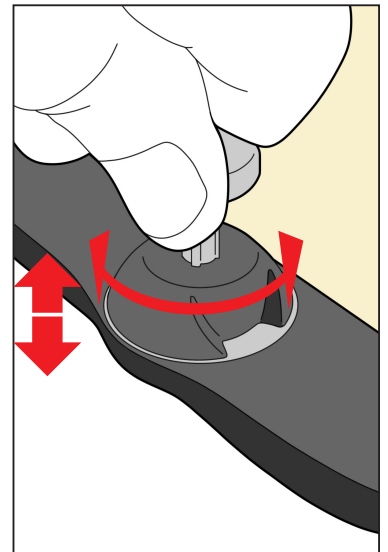


図7

BOS頭部フレーム用のAQUAPLAST RT またはFIBREPLAST マスク

セットアップ

BoSフォーム頭部／頸部サポートをデバイスの頸部域に配置します。

- ・ フォーム頭部／頸部サポートの代わりにMOLDCARE®を使用することもできます。Qfix社は、BoS頭部フレームにはRT-4492Uを使用することを推奨します。
- ・ BoSマスクの収縮を補正するためにフォームシム (RT-4485) を使用することもできます。

! 注記! BoSマスクは、BoSデバイス上のピンに取り付ける際に、マスクの溶接された側 (図11を参照) を患者に対して外向きに成形するように設計されています。マスクの成形時は、マスクのフレーム側 (図10を参照) を下にして水槽またはオープンに入れ、患者の方に向けて配置します。BoSにフレームを取り付ける際に、図9で「A」の印が付いているピンを最初に取り付けると最も簡単です。

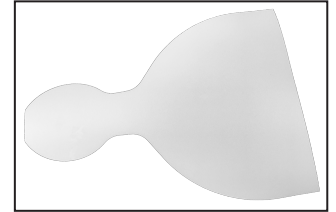


図8: フォームシム
(RT-4485)

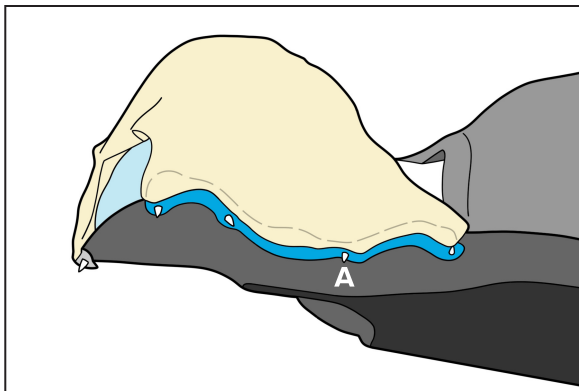


図9

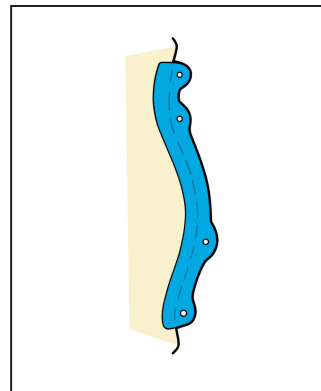


図10: フレーム側

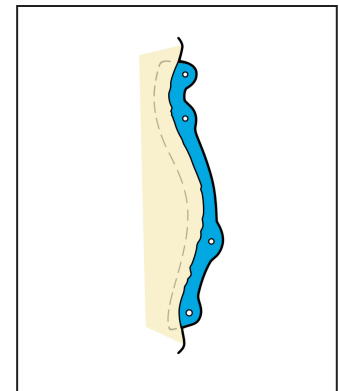


図11: 溶接側

取外し

1. 患者からマスクを取り外します。
2. 患者からデバイスを取り外します。
3. カウチトップからデバイスを取り外します。
4. カウチトップからインデックスアダプターを取り外します。

一般的な使用上の注意



併用不可

上あご／下あごのすべての歯の合成素材置換または天然歯への複合樹脂、アクリル樹脂または陶材充填の「接着」を伴う歯科修復物とは併用不可です。

その他の注意事項

- ・ マスクは使用前に毎回必ず洗浄してください。
- ・ バイトプレートを落とした場合は廃棄してください。
- ・ バイトプレートを患者の口に差し込むときは、歯とマスクの間に患者の唇が挟まれないように注意してください。
- ・ バイトプレートはアーチファクトの原因となることがあります。
- ・ バイトプレートにはボース効果がある場合があります。
- ・ 熱可塑性樹脂が顎の下に回り込んで、歯が包み込まれる可能性に注意してください。

MR安全性情報

MR 非臨床試験の結果、IntegraBiteはMR対応であることが立証されています。IntegraBiteは磁器共鳴環境下での使用が可能です。


特長

概要

個人に合わせることが可能なIntegraBiteイモビライゼーションデバイスは、頭頸部の放射線治療を受ける患者の正確で再現可能な位置づけを可能にします。IntegraBiteは、様々な角度からの治療を行うための位置付けの再現性と、患者への最大限のアクセスが得られるように設計されています。IntegraBiteシステムは、治療中に頭頸部を固定し、その位置を再現できるように設計されています。

必要な付属品

Fibreplast 熱可塑性樹脂マスク。

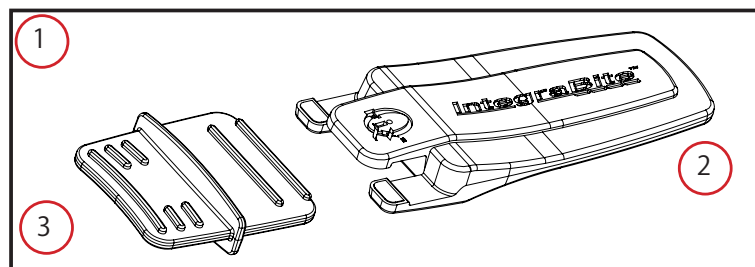

1. INTEGRABITE

2. アプリケーター

3. バイトプレート

操作方法

1. IntegraBiteが正しく組み立てられており、アプリケーターとバイトプレートが縦にそろっていることを確認します(図11)。
2. 付属のIFUを参照して、Fibreplastマスクを作製します。
3. マスクがまだ成形可能な間に、マスクを通してバイトプレートを患者の口に挿入します(図12)。
4. ガイドを使用してバイトプレートを適切な深さまで挿入します(図12)。
5. 挿入したら、バイトプレートを患者の口の中央に合わせ、患者にプレートの湾曲側を噛むように指示します。
6. マスクが冷めて正しく固まるまで待ちます。
7. マスクが完全に固まったら、IntegraBiteアプリケーターを左右どちらかにスライドさせて取り外します(図13)。

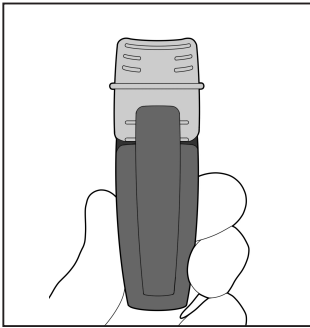


図11

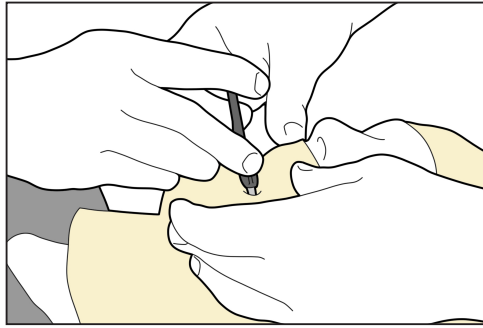


図12

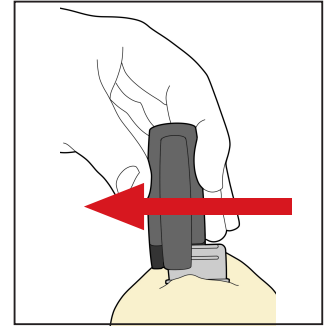


図13

クリーニングと消毒

INTEGRABITEのクリーニング

毎回の使用前に、マスクの患者の口に差し込む部分を、水性消毒液で必ずクリーニングしてください。

熱可塑性マスクのクリーニング

クリーニングする際は、溶液を浸した清潔な布で表面を拭きます。熱可塑性マスクを目視検査します。汚れている場合は、目視できれいになるまで上記のクリーニング手順を繰り返します。水で湿らせた清潔な布を使用して熱可塑性マスクを拭き、残った洗浄剤を取り除きます。乾かすには、熱可塑性マスクを清潔で乾いた布で拭きます。熱可塑性マスクのクリーニングには、以下の洗浄剤がテストの結果、適切とされています。

- 水
- 石鹼と水

成形後の熱可塑性マスクの消毒

デバイスを消毒するには、メーカーの指示に従って、次のいずれかの消毒剤を使用します。

- 10%Clorox®漂白液
- SuperSani-Cloth®
- イソプロピルアルコール
- Cidex®OPA

部品リスト

！注記！Qfix社の熱可塑性樹脂マスクには、サイズと厚さを各種取り揃えております。物理学部門において、特定の用途に適したマスクを特定してください。

製品コード	概要	包装数量
RT-1597B	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size B	5
RT-1597C	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size C	5
RT-1597D	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size D	5
RT-1597E	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size E	5
RT-1722	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 2.4 mm, Solid	5
RT-1722P24	Aquaplast RT Sheet, 2.4 mm, 18" x 24", Solid	5
RT-1776KSDGXF	Fibreplast Split Hd Only S-Frame, Ext. Face, 2.4 mm	10
RT-1776KYSDGXF	Fibreplast Open View Split Hd Only S-Frame Variable	10
RT-1778	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 2.4 mm	5
RT-1778KFORF3	Assure Open View Fibreplast 3-Point Mask, Micro Perf	10
RT-1778KFORF5	Assure Open View Fibreplast 5-Point Mask, Micro Perf	10
RT-1778KORF3	Fibreplast 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778KORF5	Fibreplast 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778KPR3D	Fibreplast PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KPR3DF	Assure Open View Fibreplast PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KPR5D	Fibreplast PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KPR5DF	Assure Open View Fibreplast PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KSDF	Fibreplast Open View Hd +Shldr 2.4 mm Micro Perf	10
RT-1778ORF3	Aquaplast RT 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778ORF4	Aquaplast RT 4-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778ORF5	Aquaplast RT 5-Point, Micro Perf 2.4 mm	10
RT-1778PR2	Aquaplast RT, PR 2-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778PR2DC	Aquaplast RT Chin Strap, Micro Perf, 20 cm	4
RT-1778PR3	Aquaplast RT, PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778PR3D	Aquaplast RT, PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778PR5	Aquaplast RT, PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778PR5D	Aquaplast RT, PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1779	Aquaplast RT U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779ESD	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 2.4 mm, Standard	10
RT-1779KESDX	Fibreplast Head Only CURVE S-Frame, 2.4 mm, Standard	10
RT-1779KR	Fibreplast Reloadable Insert, Std, 2.4 mm	5
RT-1779KS	Fibreplast Slim U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779KSD	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Std, 2.4 mm	10
RT-1779KSDX	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 2.4 mm	10
RT-1779KSX	Fibreplast Slimline U-Frame, 2.4 mm, Extended	5
RT-1779L	Aquaplast RT U-Frame, Lng, 2.4 mm	5
RT-1779O	Aquaplast RT Org U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779S	Aquaplast RT Slim U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779SD	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Std, 2.4 mm	10
RT-1779SDL	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Lng, 2.4 mm	10
RT-1779SDX	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 2.4 mm	10
RT-1779SL	Aquaplast RT Slim U-Frame, Lng, 2.4 mm	5
RT-1779SO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779SX	Aquaplast RT Slim U-Frame, Ext, 2.4 mm	5

部品リスト

製品コード	概要	包装数量
RT-1779X	Aquaplast RT U-Frame, Ext, 2.4 mm	5
RT-1781P	Aquaplast RT Sheet, 9" x 10", 2.4 mm, Perf	5
RT-1782	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 2.4 mm, Perf	5
RT-1782BOS-DXS	Aquaplast RT Head Only BoS, 2.4 mm Standard Perf	10
RT-1782ESD	Aquaplast RT Head & Shoulder CURVE S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1782KESD	Fibreplast Head & Shoulder CURVE S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1782KORF3	Fibreplast 3-Point, Std, 2.4 mm	10
RT-1782KORF5	Fibreplast 5-Point, 2.4 mm	10
RT-1782KPR3D	Fibreplast PR 3-Point, Std, 2.4 mm Locks	10
RT-1782KPR5D	Fibreplast PR 5-Point, 2.4 mm Locks	10
RT-1782KSD	Fibreplast Hd+Shldr Portrait S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1782KYSDF	Fibreplast Open View Hd + Shldr 2.4 mm Variable Perf	10
RT-1782ORF3	Aquaplast RT 3-Point, Std, 2.4 mm	10
RT-1782ORF4	Aquaplast RT 4-Point, 2.4 mm	10
RT-1782ORF5	Aquaplast RT 5-Point, 2.4 mm	10
RT-1782PR3	Aquaplast RT, PR 3-Point, Std, 2.4 mm	10
RT-1782PR3D	Aquaplast RT, PR 3-Point, Std, 2.4 mm Locks	10
RT-1782PR4	Aquaplast RT, PR 4-Point, 2.4 mm	10
RT-1782PR5	Aquaplast RT, PR 5-Point, 2.4 mm	10
RT-1782PR5D	Aquaplast RT, PR 5-Point, 2.4 mm Locks	10
RT-1782SD	Aquaplast RT Hd+Shldr Portrait S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1783P	Aquaplast RT Sheet, 12" x 18", 2.4 mm, Perf	5
RT-1783P3	Aquaplast RT Sheet, 12" x 18", 2.4 mm, Perf	5
RT-1788	Aquaplast RT Sheet, 9" x 12", 2.4 mm, Perforated	5
RT-1788P	Aquaplast RT Sheet, 9" x 12", 2.4 mm, Perf	5
RT-1819KS	Fibreplast Slim U-Frame, Std Nose, 3.2 mm	5
RT-1819KSX	Fibreplast Slim U-Frame, Ext Nose, 3.2 mm	5
RT-1821KP	Fibreplast Pelvis Precut for MT 3-point Hip System, 3.2 mm solid	10
RT-1821P	Aquaplast RT Pelvis Precut for MT 3-point Hip System, 3.2 mm solid	10
RT-1822	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 3.2 mm, Solid	5
RT-1822P18A	Aquaplast RT Pelvis, 45 cm x 60 cm, 3.2 mm	5
RT-1823P12A	Aquaplast RT 30 cm x 45 cm (12" x 18") solid with bonded Groin Lock (pre-punched)	5
RT-1848	Aquaplast RT Pelvis, 30 cm x 60 cm, 3.2 mm	5
RT-1876KFORF3	Assure Open View Fibreplast 3-Point Mask	10
RT-1876KFORF5	Assure Open View Fibreplast 5-Point Mask	10
RT-1876KSDGLF	Fibreplast Open View Split Hd Only S-Frame	10
RT-1876KYSDGLF	Fibreplast Open View Split S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-D2L	Aquaplast RT 38 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-D2LS	Aquaplast RT 31 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-D2LVS	Aquaplast RT 26 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-E2L	Aquaplast RT 48 cm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-E2LS	Aquaplast RT 43 cm Sm Hd+Shlder BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2L	Fibreplast 38 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2LS	Fibreplast 31 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2LSF	Assure Open View Fibreplast 31 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2LVS	Fibreplast 26 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-E2L	Fibreplast 48 cm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10

部品リスト

製品コード	概要	包装数量
RT-1878KBOS-E2LF	Assure Open View Fibreplast 48 cm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-E2LS	Fibreplast 43 cm Sm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KSDF	Fibreplast Open View Hd + Shld 3.2 mm Micro Perf	10
RT-1878S	Aquaplast RT, MT Breast, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-D	Aquaplast RT 38 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-DS	Aquaplast RT 31 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-DVS	Aquaplast RT 26 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-E	Aquaplast RT 48 cm Hd+Shldr BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-ES	Aquaplast RT 43 cm Hd+Shldr BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-D	Fibreplast 38 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-DS	Fibreplast 31 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-DVS	Fibreplast 26 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-DXS	Fibreplast Head Only BoS, 3.2 mm Standard Perf	10
RT-1882KBOS-E	Fibreplast 48 cm Hd+Shldr BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-ES	Fibreplast 43 cm HD+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KP	Fibreplast MT 3-Point Pelvis, 3.2 mm	5
RT-1882ORF3	Aquaplast RT 3-Point, Std, 3.2 mm	10
RT-1882ORFPLV4	Aquaplast RT 4-Point Pelvis, 3.2 mm	10
RT-1882P	Aquaplast RT, MT 3-Point Pelvis, 3.2 mm	5
RT-1882P18A	Aquaplast RT Pelvis, 45 cm x 60 cm, 3.2 mm	5
RT-1883P	Aquaplast RT Sheet, 12" x 18", 3.2 mm, Perf	5
RT-1883P12A	Aquaplast RT Pelvis, 30 cm x 45 cm, 3.2 mm	5
RT-1889	Aquaplast RT U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889ESD	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Standard	10
RT-1889ESDL	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Long	10
RT-1889ESDX	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Extended	10
RT-1889KESD	Fibreplast Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Standard	10
RT-1889KESDL	Fibreplast Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Long	10
RT-1889KESDX	Fibreplast Hd Only CURVE S-Frame, Ext, 3.2 mm	10
RT-1889KS	Fibreplast Slim U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889KSD	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Std, 3.2 mm	10
RT-1889KSDL	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Lng, 3.2 mm	10
RT-1889KSD-S3	Fibreplast Split Hd Only S-Frame Gap, 3.2 mm	10
RT-1889KSDX	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 3.2 mm	10
RT-1889KSL	Fibreplast Slim U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889KSO	Fibreplast Slim Org U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889KS-S3	Fibreplast Split Slim U-Frame Gap, Std, 3.2 mm	5
RT-1889KSX	Fibreplast Slim U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889KSXO	Fibreplast Slim Org U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889KYESD	Fibreplast Variable Perf, Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1889KYFORF3	Assure Open View Fibreplast 3-Point Mask, 3.2 mm, Variable Perf	10
RT-1889KYFORF5	Assure Open View Fibreplast 5-Point Mask, 3.2 mm, Variable Perf	10
RT-1889KYS	Fibreplast VP, Slim U-Frame, Variable, 3.2 mm	5
RT-1889KYSD	Fibreplast VP Hd Only Portrait S-Frame, Variable, 3.2 mm	10
RT-1889KYSGLF	Fibreplast Open View Slim Split-Frame U-Frame Lng	5
RT-1889L	Aquaplast RT U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889O	Aquaplast RT Org U-Frame, Std, 3.2 mm	5

部品リスト

製品コード	概要	包装数量
RT-1889S	Aquaplast RT Slim U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889SD	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Std, 3.2 mm	10
RT-1889SDL	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Lng, 3.2 mm	10
RT-1889SD-S3	Aquaplast RT Split Hd Only S-Frame Gap, 3.2 mm	10
RT-1889SDX	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 3.2 mm	10
RT-1889SL	Aquaplast RT Slim U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889SLO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889SL-S3	Aquaplast RT Split Slim U-Frame Gap, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889SO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889S-S3	Aquaplast RT Split Slim U-Frame Gap, Std, 3.2 mm	5
RT-1889S-S3O	Aquaplast RT Split Slim Org U-Frame Gap, Std, 3.2 mm	5
RT-1889SX	Aquaplast RT Slim U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889SXO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889SX-S3	Aquaplast RT Split Slim U-Frame Gap, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889SX-S3O	Aquaplast RT Split Slim Org U-Frame Gap, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889X	Aquaplast RT U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889XO	Aquaplast RT Org U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889YESD	Aquaplast RT Variable Perf, Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1889YS	Aquaplast RT VP, Slim U-Frame, Variable Perf, 3.2 mm	5
RT-1889YSD	Aquaplast RT VP Hd Only Portrait S-Frame, Variable Perf, 3.2 mm	10
RT-1889YSDR	Aquaplast RT Open Eye and Open Mouth Portrait S-frame Head Only	10
RT-1889YSR	Aquaplast RT Open Eye and Open Mouth, Slimline U-frame	5
RT-1892	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 3.2 mm, Perf	5
RT-1892ESD	Aquaplast RT Head & Shoulder CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892K	Fibreplast Sheet, 18" x 24", 3.2 mm, Perf	5
RT-1892KBOS-A2L	Fibreplast BoS, Ext Lock, 3.2 mm	5
RT-1892KBOS-C	Fibreplast 2nd Gen BoS, 3.2 mm	5
RT-1892KESD	Fibreplast Head & Shoulder CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KSD	Fibreplast Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KYESD	Fibreplast Variable Perf, Head & Shoulder CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KYSD	Fibreplast VP HD+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KYSDF	Fibreplast Open View Hd + Shdr 3.2 mm Variable Perf	10
RT-1892SD	Aquaplast RT Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892YESD	Aquaplast RT VP Hd+Shldr CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892YSD	Aquaplast RT VP Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892YSDR	Aquaplast RT Open Eye and Open Mouth Portrait S-frame Head and Shoulder	10
RT-1896K	Fibreplast Sheet, 24" x 36", 3.2 mm, Perf	5
RT-1969	Aquaplast RT Prone U-Frame, 4.8 mm	4
RT-1989S	Aquaplast RT Slim U-Frame, Std, 4.8 mm	4
RT-1989SO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Std, 4.8 mm	4
RT-A782KSD	Fibreplast Hd+Shldr Portrait S-Frame, 2.4 mm, Std Perf with Integrated Shim	5
RT-A876KSDGLF	Fibreplast Open View Split Hd Only S-Frame, 3.2 mm, Micro Perf with Integrated Shim	5
RT-A889KYSD	Fibreplast VP Hd Only Portrait S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5
RT-A892KYSD	Fibreplast VP Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5
RT-A892KYSDF	Fibreplast Open View Hd+Shldr S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5
RT-A892YSD	Aquaplast RT VP Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

📠 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2002890_JA_H
2024-02