

PRODUKTVEILEDNING OG BRUKERHÅNDBOK

Aquaplast RT[™] - og
Fibreplast[®]-termoplast
og IntegraBite[™]



 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom	
 <i>Produsert i USA av</i> Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Registro Anvisa No: 81300160001

Fibreplast® er et registrert varemerke som tilhører Qfix.

Aquaplast RT, Assure, IntegraBite og Integrated Shim er varemerker som tilhører Qfix.

Moldcare® er et registrert varemerke som tilhører ALCARE CO, LTD.

Clorox® er et registrert varemerke som tilhører The Clorox Company.

Super Sani-Cloth® er et registrert varemerke som tilhører PDI Healthcare.

Cidex® er et registrert varemerke som tilhører Johnson & Johnson.

AQUAPLAST RT™- OG FIBREPLAST®-TERMOPLAST

BEREGNET BRUK

Aquaplast RT og Fibreplast er beregnet på immobilisering, posisjonering og reposisjonering av pasienter som gjennomgår strålebehandling.

! MERK ! Amerikansk lov krever at dette utstyret kun selges av eller etter fullmakt fra lege.

PASIENTMÅLGRUPPER

Pasienter som gjennomgår strålebehandling eller prosedyrer med diagnostisk avbildning.

TILTENKTE BRUKERE

Tiltente brukere for produktene er personer som er kvalifisert i henhold til kravene i lokale forskrifter.

FORHOLDSREGLER FOR BRUK

- Bruken av denne enheten kan forårsake mild sensibilisering ved kontakt med menneskelig hud.
- Aquaplast RT- og Fibreplast-termoplastenheter leveres kun for enkeltpasientbruk og er ikke sterile.
- Termoplastmasker vil attenuere en strålebehandlingsstråle og øke huddosen. Attenuering og økt huddose må tas i betraktning under planlegging og behandling.
- Du finner en liste over symboler og definisjonen av dem på Qfix.com.

! ADVARSEL ! VERIFISERING AV PASIENTPOSISJON MÅ UTFØRES UNDER PLANLEGGING OG BEHANDLING I ET STRÅLEBEHANDLINGSMILJØ. FØLG STANDARDISERTE OPPSETTPROTOKOLLER FOR VERIFISERING FOR Å BEKREFTE PASIENTPOSISJONEN FØR BEHANDLINGEN LEVERES.

! ADVARSEL ! EFFEKTER AV DOSEDYBDE, AVSETNING OG OVERGANGSOMRÅDE MÅ EVALUERES UNDER PLANLEGGING OG BEHANDLING I ET PROTONBEHANDLINGSMILJØ.

! MERK ! Ikke oppbevar masken med pinnene trykket inn.

! MERK ! Ikke løft masken etter pinnene.

ALVORLIGE HENDELSER

Rapporter alle alvorlige hendelser (f.eks. hendelser som fører til, eller kan føre til død eller alvorlig personskade) til både Qfix og den relevante myndigheten i landet.

INFORMASJON OM MR-SIKKERHET



 Ikke-klinisk testing har vist at **Aquaplast RT- og Fibreplast-termoplast** er MR-sikre. **Aquaplast RT- og Fibreplast-termoplasten** kan brukes i et MR-miljø.

AQUAPLAST RT™- OG FIBREPLAST®-TERMOPLAST

INFORMASJON OG NYTTIGE TIPS

- Aquaplast RT og Fibreplast er tilgjengelige i en rekke størrelser og tykkelser. Du finner et komplett utvalg av termoplast og mer informasjon i Qfix-katalogen og på www.Qfix.com.
- Aquaplast RT- og Fibreplast-termoplast kan tilpasses til bruk med kommersielt tilgjengelige immobiliserings- og posisjoneringsenheter, f.eks. skummidler og vakuumputer. Aquaplast RT og Fibreplast kan dessuten endres slik at de kan brukes med de fleste tilpassede systemene for immobilisering av hode og nakke.
- En dusjhette kan brukes til å dekke til pasientens hår under maskefremstilling. I den myke tilstanden kan masker feste seg til hår som har blitt sprayet med hårspray.
- Slik oppnår du optimal tilpasning og pasientkomfort:
 - En gasbindpute på 10 x 10 cm (4 x 4 tommer) kan plasseres over beinete fremspring for å lindre potensielle trykkpunkter.
 - En shim eller tilsvarende enhet kan plasseres under pasientens hode under fremstilling av masken. Shims kan legges til eller fjernes underveis for å justeres maskens tilpasning.
- Eventuelle åpne sår eller lesjoner må dekkes med en bandasje eller et plastomslag i henhold til sykehusprotokoll før forming av masken.
- Når masken ikke er i bruk, må den holdes unna varme og direkte sollys.
- Aquaplast RT og Fibreplast skal kasseres i henhold til sykehusprotokoll.

IDENTIFISERE S-RAMMEPINNE

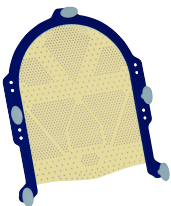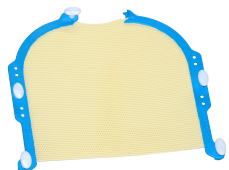Rammefarge	Pinnefarge
 Mørkeblå	 Grå pinner
 Lyseblå	 Hvite pinner

RAPIDHEAT™-OVN

MYKGJØRE TERMOPLASTMASKEN

! ADVARSEL ! FØLG ALLE ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BRUKSANVISNINGER SOM FINNES I PRODUKTVEILEDNINGEN OG BRUKERHÅNDBOKEN FOR RAPIDHEAT™-OVN.

! ADVARSEL ! OVNSTATIVENE KAN VÆRE VARME! MÅ HÅNDTERES MED FORSIKTIGHET. BRUK HÅNDVERN VED HÅNDTERING.

Før du tar pasienten inn i simuleringsrommet, slår du på RapidHeat™-ovnen ved å trykke på strømknappen .

Manuell modus

1. Når programindikatoren (P01, P02 osv.) slutter å blinke, trykker du på ØK-knappen  eller REDUSER-knappen  for å angi ønsket temperatur. Lyset blinker ved siden av det lille TEMPERATUR-ikonet .
2. Trykk på TIMER-knappen . Lyset blinker ved siden av det lille TIMER-ikonet . Trykk på ØK-knappen  eller REDUSER-knappen  for å angi ønsket oppvarmingstid.
3. Trykk på START/STOPP  for å starte forvarmingssyklusen. "PrH" blinker på displayet for FORVARMING. Gå til delen "Varme opp masken".

! MERK ! Når du endrer temperaturen, må du kontrollere at lampen ved siden av det lille TEMPERATUR-ikonet  blinker. Når du endrer oppvarmingstiden, må du kontrollere at lampen ved siden av det lille TIMER-ikonet  blinker.

Programmodus

1. Når programindikatoren (P01, P02 osv.) **blinker**, trykker du på ØK-knappen  eller REDUSER-knappen  til ønsket program er valgt.
2. Trykk på START/STOPP  for å starte forvarmingssyklusen.

! MERK ! Displayet viser det siste lagrede programmet med blinkende P01 (Program 1), P02 (Program 2), osv. Hvis displayet slutter å blinke før ønsket program er valgt, trykker du på P-knappen  og trykker på ØK-knappen  eller REDUSER-knappen  til ønsket program er valgt.

RAPIDHEAT™-OVN

Varme opp masken

1. Ovnens piper og displayet angir "PrH READY" når ovnen har fullført forvarmingssyklusen og er klar til å varme opp termoplastmasken.
2. Plasser Aquaplast RT- eller Fibreplast-masken på toppen av nettforingen.
3. Bruk nettforingen som et overføringslag og plasser nettforingen på ovnstativet.

! MERK ! Plasser den nedre kanten av maskerammen mot baksiden av ovnen, og juster etter den bakre kanten av ovnstativet. Maskens hode skal innrettes etter forkanten av ovnsstativet fremst i ovnen.

4. Når ovnsdøren er lukket, trykker du på START/STOPP . Timeren begynner å telle ned.
 - Under mykningssyklusen kan du følge med på den faktiske temperaturen i ovnskammeret ved å trykke på TEMPERATUR-knappen  én gang.
 - Hvis du vil øke eller redusere ovnstemperaturen, trykker du på ØK-knappen  eller REDUSER-knappen  til ønsket temperatur er nådd.
 - Hvis du vil øke eller redusere verdien på nedtellingstimeren, trykker du på TIMER-knappen  etterfulgt av ØK-knappen  eller REDUSER-knappen  for angi ønsket oppvarmingstid på nytt.
 - Trykk på LAMPE-knappen  for å belyse ovnen innvendig. Lyset forblir på i 60 sekunder.
 - Hvis du åpner ovnsdøren under mykningsprosessen, settes timeren på pause. Timeren gjenopptar nedtellingingen når ovnsdøren lukkes.
5. Når timeren når null, piper ovnen tre ganger, og deretter én gang hvert 60. sekund. Dette angir at mykningssyklusen er fullført. Displayet viser "READY". Bruk nettforingen som et overføringslag, og fjern masken fra ovnstativet.
6. Sørg for at masken er avkjølt tilstrekkelig for pasientens komfort før pasientkontakt.

Anbefalte oppvarmingstider og temperaturer for Qfix-termoplastmasker

Termoplast	Oppvarmingstid	Oppvarmingstemperatur
Aquaplast RT- og Fibreplast-masker	3–11 minutter	74 °C (165 °F)

! ADVARSEL ! IKKE VARM OPP MASKEN Lenger enn i 30 MINUTTER.

VANNBAD

MYKGJØRE TERMOPLASTMASKEN

! ADVARSEL ! FØLG ALLE ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BRUKSANVISNINGER SOM FINNES I PRODUKTVEILEDNINGEN OG BRUKERHÅNDBOKEN FOR VANNBADET.

1. Før du tar pasienten inn i simuleringsrommet, slår du på vannbadet og kontrollerer at det er nok vann til å dekke termoplastenheten.
2. Plasser nettforingen i det varme vannet og plasser masken på toppen.

Anbefalte oppvarmingstider og temperaturer for Qfix-termoplastmasker

Termoplast	Oppvarmingstid	Oppvarmingstemperatur
Aquaplast RT-masker	2 minutter	70–75 °C (160–170 °F)
Fibreplast-masker	2 minutter	75–80 °C (165–175 °F)

! ADVARSEL ! IKKE ETTERLAT MASKEN I VANNBADET LENGER ENN I 30 MINUTTER.

3. Bruk nettforingen som overføringslag til å fjerne rammen fra vannet og bruk et tørt håndkle til å trekke inn overflødig vann. Forsikre deg om at masken er tørr og avkjølt tilstrekkelig for pasientens komfort.

! ADVARSEL ! RAMMEN OG TERMOPLASTMATERIALET KAN VÆRE VARMT! HÅNDBERØR MED FORSIKTIGHET. LA AVKJØLES NOE FØR PASIENTKONTAKT FOR Å UNNGÅ PASIENTSKADE.

FORMINGSINSTRUKSJONER

FORMINGSINSTRUKSJONER FOR AQUAPLAST RT OG FIBREPLAST

1. Bruk passende hodestøtte- og MOLDCARE®-alternativer, avhengig av hvilken enhet du bruker.

! MERK ! Avhengig av hvilken type enhet du bruker, kan det være nyttig å strekke materialet på forhånd før du plasserer masken på pasienten. Hvis du strekker materialet på forhånd, får du et mer enhetlig hullmønster i den ferdige masken, og krympeeffekten vil bli redusert. Det anbefales ikke å strekke Fibreplast på forhånd.

2. Når du skal strekke en U-ramme eller S-ramme på forhånd, holder du masken mot hoften din med den ene hånden og strekker masken ca. 15 cm (6 tommer) med den andre hånden. (Fig. 1)

3. Før du plasserer den myknede masken over pasienten, må du teste at den ikke er for varm.

4. Begynn med å hekte kanten på termoplasten under pasientens hake med termoplasten skråstilt opp i en vinkel på 45° mot pasientens ansikt. (Fig. 2)

! MERK ! Fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilken type enhet som brukes.

5. Strekk termoplasten opp 15 til 20 cm (6 til 8 tommer) og tilbake ned på enheten. (Fig. 3)

6. Fest masken til enheten.

! MERK ! Hvordan masken festes, kan variere avhengig av hvilken type enhet som brukes.

7. Gjør deg ferdig med å forme masken med forsiktig fingertrykk for å oppnå ønsket kontur av pasientens hode og en kontur rundt nesebuen. (Fig. 4)

8. La masken avkjøles helt, minst 10–15 minutter, før du tar den av. Hvis det er mulig, starter du simuleringen mens masken avkjøles. Ikke fjern masken før simuleringen er fullført.

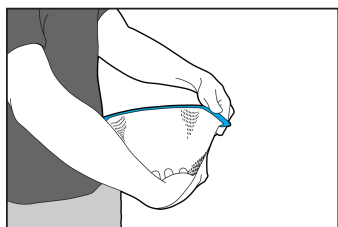


Fig. 1

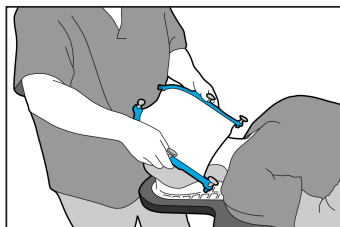


Fig. 2

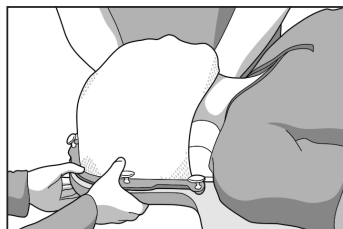


Fig. 3

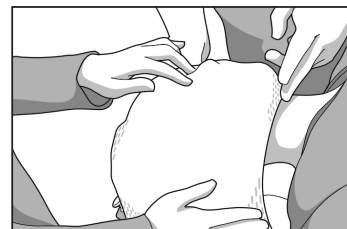


Fig. 4

EKSEMPLER PÅ PLASSERING AV TERMOPLAST MED VARIABEL PERF

Følgende er et eksempel på hvordan termoplast med variabel perf skal plasseres på pasientens ansikt med nesestykket og haken i riktig posisjon.

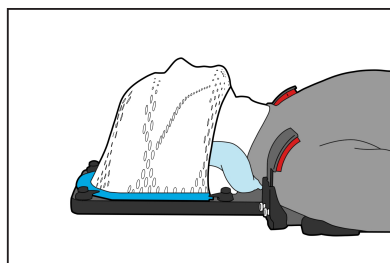


Fig. 5

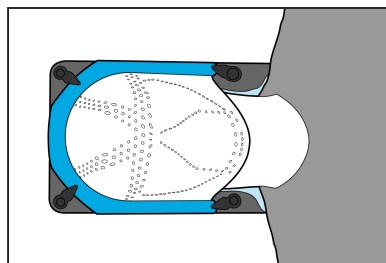


Fig. 6

FORMINGSINSTRUKSJONER

FORMINGSINSTRUKSJONER FOR ASSURE™ OPEN VIEW BARE FOR HODE

1. Bruk passende hodestøtte- og MOLDCARE®-alternativer, avhengig av hvilken enhet du bruker.
2. Før du plasserer den myknede masken over pasienten, må du teste at den ikke er for varm.
3. Skyv termoplastmasken over pasienten. Begynn med øvre bryst, og plasser den inferiore grensen for Open View nederst ved nesen og den superiore grensen 1 cm over øyenbrynet.
4. Før masken festes, må en andre person plassere hendene sine langs superior og inferior grense for å sikre at maskens åpning festes til enheten.
5. Strekk termoplasten 15 til 20 cm (6 til 8 tommer) ned til enheten.
6. Fest masken til enheten.

! MERK ! Hvordan masken festes, kan variere avhengig av hvilken type enhet som brukes.

7. Fold bunnen av masken opp rundt pasientens hake for ekstra fasthet og stabilitet.
8. Gjør deg ferdig med å forme masken med forsiktig fingertrykk for å oppnå ønsket kontur av pasientens hode.
9. La masken avkjøles helt, minst 10–15 minutter, før du tar den av. Hvis det er mulig, starter du simuleringen mens masken avkjøles. Ikke fjern masken før simuleringen er fullført.

FORMINGSINSTRUKSJONER FOR ASSURE OPEN VIEW FOR HODE OG SKULDRE

1. Se trinn 1–3 i delen om Assure Open View bare for hode.
2. Før masken festes, må en andre person feste termoplasten på brystet med to hender.
3. Begynn med å strekke masken sakte ned til enheten mens du passer på at du ikke strekker Open View-åpningen for mye, og fest låsepinnene.
4. Gjør deg ferdig med å forme masken med forsiktig fingertrykk for å oppnå ønsket kontur av pasientens hode og skuldre.
5. La masken avkjøles helt, minst 10–15 minutter, før du tar den av. Hvis det er mulig, starter du simuleringen mens masken avkjøles. Ikke fjern masken før simuleringen er fullført.

FORMINGSINSTRUKSJONER

FORMINGSINSTRUKSJONER FOR MASKER MED INTEGRATED SHIMS

! MERK ! Hvis Integrated Shim-pinnen trekkes ut av rammen, må du kaste masken. Ikke prøv å sette sammen Integrated Shim-masken igjen.

1. Roter hver pinne på den anteriore termoplastmasken til ønsket shimshøyde. 2 mm anbefales (markeringer er i trinn på 0,5 mm). (Fig. 7)
2. Følg én av følgende deler, avhengig av hvilken type termoplastmaske du bruker:
 - Formingsinstruksjoner for Aquaplast RT og Fibreplast – følg trinn 1–5.
 - Formingsinstruksjoner for Assure Open View bare for hode – følg trinn 1–4.
 - Formingsinstruksjoner for Assure Open View for hode og skuldre – følg trinn 1–3.

! MERK ! Før du sikrer den anteriore masken på plass, må du verifisere at Integrated Shims™ er stilt til ønsket høyde.

! ADVARSEL ! NÅR DU SIKRER MASKEN, MÅ DU SØRGE FOR AT DU IKKE KLEMMER PASIENTEN ELLER OPERATØREN MELLOM MASKEN OG ENHETEN.

3. Fest termoplastmasken ved å trykke ned alle pinnene. Du skal høre et klikk, som angir at termoplastmasken er festet.
4. Gjør deg ferdig med å forme masken med forsiktig fingertrykk for å oppnå ønsket kontur av pasientens hode og skuldre.
5. La masken avkjøles helt, minst 10–15 minutter, før du tar den av. Hvis det er mulig, starter du simuleringen mens masken avkjøles. Ikke fjern masken før simuleringen er fullført.

! MERK ! Integrated Shim System™ er bygd inn i termoplastmaskene og muliggjør implementering av høydejusteringer uten å fjerne maskesystemet.

- Angi ønsket shim-høyde når termoplastmasken er på eller av pasienten, ved å rotere pinnen. Vri med klokken for å øke høyden og mot klokken for å redusere høyden.
- Shim-justeringer utføres i trinn på 0,5 mm.
- Hver av shim-høydene kan justeres uavhengig av hverandre.

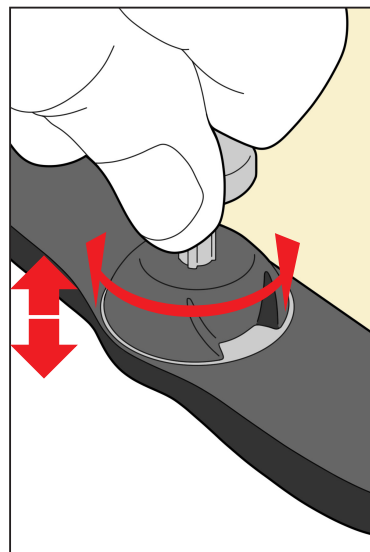


Fig. 7

AQUAPLAST RT - ELLER FIBREPLAST-MASKE FOR BOS-HODERAMME

OPPSETT

Plasser BoS-hode-/nakkestøtten i skum på enhetens halsområde.

- MOLDCARE® kan brukes i stedet for hode-/nakkestøtten i skum. Qfix anbefaler å bruke RT-4492U sammen med BoS-hoderammen.
- En shim i skum (RT-4485) kan brukes til å kompensere for BoS-maskens krymping.

! MERK ! BoS-masken er utformet for å formes med den sveisede siden (se figur 11) av masken vendt ut i forhold til pasienten når den festes til pinnene på BoS-enheten. Plasser maskens rammeside (se figur 10) vendt ned i vannbadet eller ovnen og mot pasienten under maskeforming. Det er lettest å feste rammen til BoS ved først å feste pinnen merket "A" i figur 9.

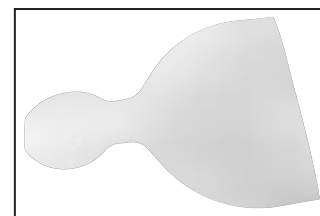


Fig. 8: Shim i skum (RT-4485)

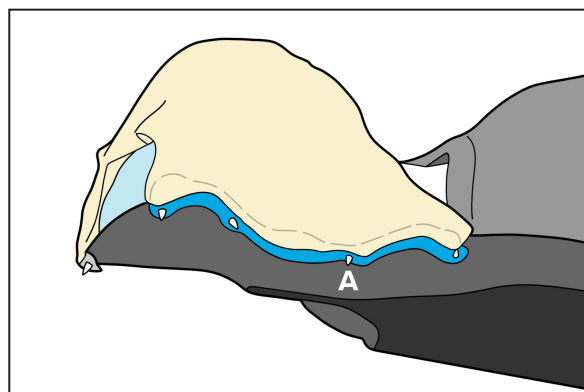


Fig. 9

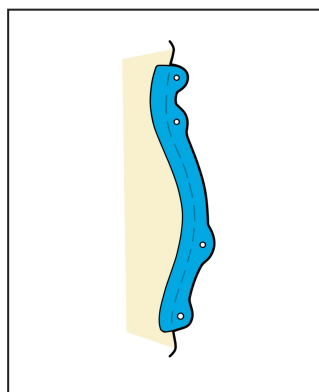


Fig. 10: Rammeside

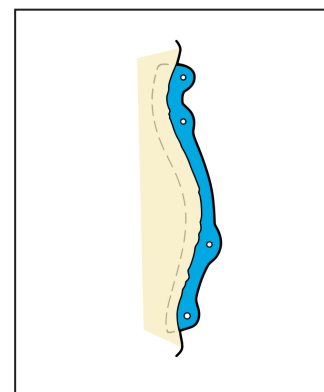


Fig. 11: Sveiset side

FJERNING

1. Fjern masken fra pasienten.
2. Fjern pasienten fra enheten.
3. Fjern enheten fra bordtoppen.
4. Fjern indekseringsadapteren fra bordtoppen.

GENERELLE FORHOLDSREGLER



Skal ikke brukes sammen med

Skal ikke brukes med en syntetisk protese for alle tennene i over-/underkjeven eller tannrestaureringer som omfatter "binding" av komposittfarpiks, akryl eller porselensfylling til naturlige tenner.

Ytterligere forholdsregler

- Husk å rengjøre masken før hver bruk.
- Kasser biteplaten hvis du mister den i bakken.
- Vær forsiktig når du setter inn biteplaten i pasientens munn, slik at leppene ikke kommer i klem mellom tennene og masken.
- Biteplaten kan forårsake dannelse av artefakter.
- Biteplaten kan ha en boluseffekt.
- Utvis forsiktighet når det gjelder med muligheten for å innkapsle en tann ved å la termoplastenhetene flyte rundt et undersnitt.

INFORMASJON OM MR-SIKKERHET

MR Ikke-klinisk testing har vist at **IntegraBite** er MR-sikker. **IntegraBite** kan brukes i et MR-miljø.


EGENSKAPER

Beskrivelse

Den individuelle IntegraBite-immobiliseringsenheten gir nøyaktig og reproducerbar posisjonering for pasienter som får strålebehandling av hode og nakke. IntegraBite er utformet for å sikre repeterbar posisjonering og maksimal tilgang til pasienten for behandling fra ulike vinkler. IntegraBite-systemet er utformet for å immobilisere hode- og nakkeområdet under behandlingen og muliggjør replikering av posisjonen.

Nødvendig tilbehør

Fibreplast-termoplastmaske

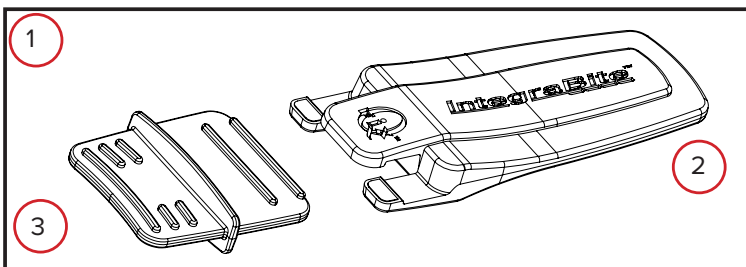

1. INTEGRABITE
2. APPLIKATOR
3. BITEPLATE

INSTRUKSJONER FOR BRUK

1. Sørg for at IntegraBite er satt riktig sammen med applikatoren og biteplaten innrettet vertikalt. (Fig. 11)
2. Lag Fibreplast-masken som forklart i bruksanvisningen som følger med.
3. Før biteplaten gjennom masken og inn i pasientens munn mens masken fremdeles kan formes. (Fig. 12)
4. Bruk føringen til å føre biteplaten inn til riktig dybde. (Fig. 12)
5. Sett biteplaten inn i pasientens munn, og sentrer den. Be pasienten om å bite på den buede enden av platen.
6. La masken avkjøles og stivne ordentlig.
7. Når masken er ferdig stivnet, fjerner du IntegraBite-applikatoren fra biteplaten ved å skyve den mot høyre eller venstre. (Fig. 13)

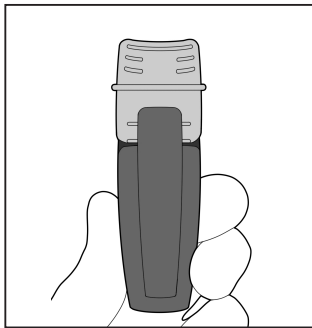


Fig. 11

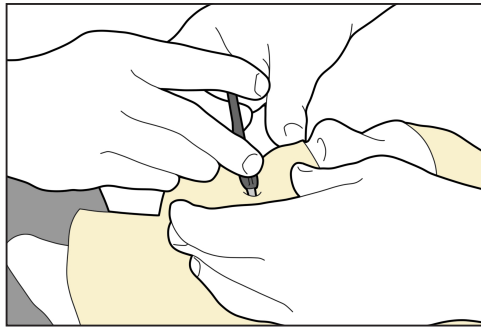


Fig. 12

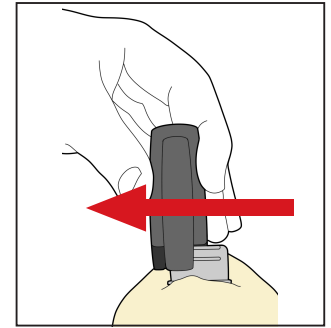


Fig. 13

RENGJØRE OG DESINFISERE

RENGJØRING AV INTEGRABITE

Sørg for å rengjøre delen av masken som settes inn i pasientens munn, med en vannbasert antiseptisk løsning før hver gangs bruk.

RENGJØRING AV TERMOPLASTMASKEN

Rengjør ved å påføre løsningen på en ren klut og tørke av overflaten. Inspiser termoplastmasken visuelt. Hvis den ikke er ren, må de foregående rengjøringstrinnene gjentas til den er synlig ren. Bruk en ren klut som er fuktet med vann, og tørk av termoplastmasken for å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddel. Tørk av termoplastmasken med en ren, tørr klut for å tørke den. Følgende rengjøringsmateriale er testet og har vist seg å passe til termoplastmasken.

- Vann
- Såpe og vann

DESINFISERING AV TERMOPLASTMASKEN ETTER FORMING

Enheten desinfiseres ved å bruke ett av følgende desinfeksjonsmidler i henhold til produsentens instruksjoner.

- 10 % Clorox® blekemiddel
- Super Sani-Cloth®
- Isopropanol
- Cidex® OPA

DELELISTE

! MERK ! Qfix leverer termoplastmasker i en rekke størrelser og tykkelser. La fysikkavdelingen bestemme hvilken maske som passer til et gitt bruksområde.

Produktkode	Beskrivelse	Antall per pakke
RT-1597B	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size B	5
RT-1597C	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size C	5
RT-1597D	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size D	5
RT-1597E	Aquaplast RT Cosmas Cup, Size E	5
RT-1722	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 2.4 mm, Solid	5
RT-1722P24	Aquaplast RT Sheet, 2.4 mm, 18" x 24", Solid	5
RT-1776KSDGXF	Fibreplast Split Hd Only S-Frame, Ext. Face, 2.4 mm	10
RT-1776KYSDGXF	Fibreplast Open View Split Hd Only S-Frame Variable	10
RT-1778	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 2.4 mm	5
RT-1778KFORF3	Assure Open View Fibreplast 3-Point Mask, Micro Perf	10
RT-1778KFORF5	Assure Open View Fibreplast 5-Point Mask, Micro Perf	10
RT-1778KORF3	Fibreplast 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778KORF5	Fibreplast 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778KPR3D	Fibreplast PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KPR3DF	Assure Open View Fibreplast PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KPR5D	Fibreplast PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KPR5DF	Assure Open View Fibreplast PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778KSDF	Fibreplast Open View Hd +Shldr 2.4 mm Micro Perf	10
RT-1778ORF3	Aquaplast RT 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778ORF4	Aquaplast RT 4-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778ORF5	Aquaplast RT 5-Point, Micro Perf 2.4 mm	10
RT-1778PR2	Aquaplast RT, PR 2-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778PR2DC	Aquaplast RT Chin Strap, Micro Perf, 20 cm	4
RT-1778PR3	Aquaplast RT, PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778PR3D	Aquaplast RT, PR 3-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1778PR5	Aquaplast RT, PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm	10
RT-1778PR5D	Aquaplast RT, PR 5-Point, Micro Perf, 2.4 mm Locks	10
RT-1779	Aquaplast RT U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779ESD	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 2.4 mm, Standard	10
RT-1779KESDX	Fibreplast Head Only CURVE S-Frame, 2.4 mm, Standard	10
RT-1779KR	Fibreplast Reloadable Insert, Std, 2.4 mm	5
RT-1779KS	Fibreplast Slim U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779KSD	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Std, 2.4 mm	10
RT-1779KSDX	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 2.4 mm	10
RT-1779KSX	Fibreplast Slimline U-Frame, 2.4 mm, Extended	5
RT-1779L	Aquaplast RT U-Frame, Lng, 2.4 mm	5
RT-1779O	Aquaplast RT Org U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779S	Aquaplast RT Slim U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779SD	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Std, 2.4 mm	10
RT-1779SDL	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Lng, 2.4 mm	10
RT-1779SDX	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 2.4 mm	10
RT-1779SL	Aquaplast RT Slim U-Frame, Lng, 2.4 mm	5
RT-1779SO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Std, 2.4 mm	5
RT-1779SX	Aquaplast RT Slim U-Frame, Ext, 2.4 mm	5

DELELISTE

Produktkode	Beskrivelse	Antall per pakke
RT-1779X	Aquaplast RT U-Frame, Ext, 2.4 mm	5
RT-1781P	Aquaplast RT Sheet, 9" x 10", 2.4 mm, Perf	5
RT-1782	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 2.4 mm, Perf	5
RT-1782BOS-DXS	Aquaplast RT Head Only BoS, 2.4 mm Standard Perf	10
RT-1782ESD	Aquaplast RT Head & Shoulder CURVE S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1782KESD	Fibreplast Head & Shoulder CURVE S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1782KORF3	Fibreplast 3-Point, Std, 2.4 mm	10
RT-1782KORF5	Fibreplast 5-Point, 2.4 mm	10
RT-1782KPR3D	Fibreplast PR 3-Point, Std, 2.4 mm Locks	10
RT-1782KPR5D	Fibreplast PR 5-Point, 2.4 mm Locks	10
RT-1782KSD	Fibreplast Hd+Shldr Portrait S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1782KYSDF	Fibreplast Open View Hd + Shldr 2.4 mm Variable Perf	10
RT-1782ORF3	Aquaplast RT 3-Point, Std, 2.4 mm	10
RT-1782ORF4	Aquaplast RT 4-Point, 2.4 mm	10
RT-1782ORF5	Aquaplast RT 5-Point, 2.4 mm	10
RT-1782PR3	Aquaplast RT, PR 3-Point, Std, 2.4 mm	10
RT-1782PR3D	Aquaplast RT, PR 3-Point, Std, 2.4 mm Locks	10
RT-1782PR4	Aquaplast RT, PR 4-Point, 2.4 mm	10
RT-1782PR5	Aquaplast RT, PR 5-Point, 2.4 mm	10
RT-1782PR5D	Aquaplast RT, PR 5-Point, 2.4 mm Locks	10
RT-1782SD	Aquaplast RT Hd+Shldr Portrait S-Frame, 2.4 mm	10
RT-1783P	Aquaplast RT Sheet, 12" x 18", 2.4 mm, Perf	5
RT-1783P3	Aquaplast RT Sheet, 12" x 18", 2.4 mm, Perf	5
RT-1788	Aquaplast RT Sheet, 9" x 12", 2.4 mm, Perforated	5
RT-1788P	Aquaplast RT Sheet, 9" x 12", 2.4 mm, Perf	5
RT-1819KS	Fibreplast Slim U-Frame, Std Nose, 3.2 mm	5
RT-1819KSX	Fibreplast Slim U-Frame, Ext Nose, 3.2 mm	5
RT-1821KP	Fibreplast Pelvis Precut for MT 3-point Hip System, 3.2 mm solid	10
RT-1821P	Aquaplast RT Pelvis Precut for MT 3-point Hip System, 3.2 mm solid	10
RT-1822	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 3.2 mm, Solid	5
RT-1822P18A	Aquaplast RT Pelvis, 45 cm x 60 cm, 3.2 mm	5
RT-1823P12A	Aquaplast RT 30 cm x 45 cm (12" x 18") solid with bonded Groin Lock (pre-punched)	5
RT-1848	Aquaplast RT Pelvis, 30 cm x 60 cm, 3.2 mm	5
RT-1876KFORF3	Assure Open View Fibreplast 3-Point Mask	10
RT-1876KFORF5	Assure Open View Fibreplast 5-Point Mask	10
RT-1876KSDGLF	Fibreplast Open View Split Hd Only S-Frame	10
RT-1876KYSDGLF	Fibreplast Open View Split S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-D2L	Aquaplast RT 38 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-D2LS	Aquaplast RT 31 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-D2LVS	Aquaplast RT 26 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-E2L	Aquaplast RT 48 cm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878BOS-E2LS	Aquaplast RT 43 cm Sm Hd+Shlder BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2L	Fibreplast 38 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2LS	Fibreplast 31 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2LSF	Assure Open View Fibreplast 31 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-D2LVS	Fibreplast 26 cm Hd+Neck BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-E2L	Fibreplast 48 cm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10

DELELISTE

Produktkode	Beskrivelse	Antall per pakke
RT-1878KBOS-E2LF	Assure Open View Fibreplast 48 cm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KBOS-E2LS	Fibreplast 43 cm Sm Hd+Shldr BoS Flap, 3.2 mm	10
RT-1878KSDF	Fibreplast Open View Hd + Shld 3.2 mm Micro Perf	10
RT-1878S	Aquaplast RT, MT Breast, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-D	Aquaplast RT 38 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-DS	Aquaplast RT 31 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-DVS	Aquaplast RT 26 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-E	Aquaplast RT 48 cm Hd+Shldr BoS, 3.2 mm	10
RT-1882BOS-ES	Aquaplast RT 43 cm Hd+Shldr BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-D	Fibreplast 38 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-DS	Fibreplast 31 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-DVS	Fibreplast 26 cm Hd+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-DXS	Fibreplast Head Only BoS, 3.2 mm Standard Perf	10
RT-1882KBOS-E	Fibreplast 48 cm Hd+Shldr BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KBOS-ES	Fibreplast 43 cm HD+Neck BoS, 3.2 mm	10
RT-1882KP	Fibreplast MT 3-Point Pelvis, 3.2 mm	5
RT-1882ORF3	Aquaplast RT 3-Point, Std, 3.2 mm	10
RT-1882ORFPLV4	Aquaplast RT 4-Point Pelvis, 3.2 mm	10
RT-1882P	Aquaplast RT, MT 3-Point Pelvis, 3.2 mm	5
RT-1882P18A	Aquaplast RT Pelvis, 45 cm x 60 cm, 3.2 mm	5
RT-1883P	Aquaplast RT Sheet, 12" x 18", 3.2 mm, Perf	5
RT-1883P12A	Aquaplast RT Pelvis, 30 cm x 45 cm, 3.2 mm	5
RT-1889	Aquaplast RT U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889ESD	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Standard	10
RT-1889ESDL	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Long	10
RT-1889ESDX	Aquaplast RT Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Extended	10
RT-1889KESD	Fibreplast Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Standard	10
RT-1889KESDL	Fibreplast Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm, Long	10
RT-1889KESDX	Fibreplast Hd Only CURVE S-Frame, Ext, 3.2 mm	10
RT-1889KS	Fibreplast Slim U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889KSD	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Std, 3.2 mm	10
RT-1889KSDL	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Lng, 3.2 mm	10
RT-1889KSD-S3	Fibreplast Split Hd Only S-Frame Gap, 3.2 mm	10
RT-1889KSDX	Fibreplast Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 3.2 mm	10
RT-1889KSL	Fibreplast Slim U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889KSO	Fibreplast Slim Org U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889KS-S3	Fibreplast Split Slim U-Frame Gap, Std, 3.2 mm	5
RT-1889KSX	Fibreplast Slim U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889KSXO	Fibreplast Slim Org U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889KYESD	Fibreplast Variable Perf, Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1889KYFORF3	Assure Open View Fibreplast 3-Point Mask, 3.2 mm, Variable Perf	10
RT-1889KYFORF5	Assure Open View Fibreplast 5-Point Mask, 3.2 mm, Variable Perf	10
RT-1889KYS	Fibreplast VP, Slim U-Frame, Variable, 3.2 mm	5
RT-1889KYSD	Fibreplast VP Hd Only Portrait S-Frame, Variable, 3.2 mm	10
RT-1889KYSGLF	Fibreplast Open View Slim Split-Frame U-Frame Lng	5
RT-1889L	Aquaplast RT U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889O	Aquaplast RT Org U-Frame, Std, 3.2 mm	5

DELELISTE

Produktkode	Beskrivelse	Antall per pakke
RT-1889S	Aquaplast RT Slim U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889SD	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Std, 3.2 mm	10
RT-1889SDL	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Lng, 3.2 mm	10
RT-1889SD-S3	Aquaplast RT Split Hd Only S-Frame Gap, 3.2 mm	10
RT-1889SDX	Aquaplast RT Hd Only Portrait S-Frame, Ext, 3.2 mm	10
RT-1889SL	Aquaplast RT Slim U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889SLO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889SL-S3	Aquaplast RT Split Slim U-Frame Gap, Lng, 3.2 mm	5
RT-1889SO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Std, 3.2 mm	5
RT-1889S-S3	Aquaplast RT Split Slim U-Frame Gap, Std, 3.2 mm	5
RT-1889S-S3O	Aquaplast RT Split Slim Org U-Frame Gap, Std, 3.2 mm	5
RT-1889SX	Aquaplast RT Slim U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889SXO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889SX-S3	Aquaplast RT Split Slim U-Frame Gap, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889SX-S3O	Aquaplast RT Split Slim Org U-Frame Gap, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889X	Aquaplast RT U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889XO	Aquaplast RT Org U-Frame, Ext, 3.2 mm	5
RT-1889YESD	Aquaplast RT Variable Perf, Head Only CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1889YS	Aquaplast RT VP, Slim U-Frame, Variable Perf, 3.2 mm	5
RT-1889YSD	Aquaplast RT VP Hd Only Portrait S-Frame, Variable Perf, 3.2 mm	10
RT-1889YSDR	Aquaplast RT Open Eye and Open Mouth Portrait S-frame Head Only	10
RT-1889YSR	Aquaplast RT Open Eye and Open Mouth, Slimline U-frame	5
RT-1892	Aquaplast RT Sheet, 18" x 24", 3.2 mm, Perf	5
RT-1892ESD	Aquaplast RT Head & Shoulder CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892K	Fibreplast Sheet, 18" x 24", 3.2 mm, Perf	5
RT-1892KBOS-A2L	Fibreplast BoS, Ext Lock, 3.2 mm	5
RT-1892KBOS-C	Fibreplast 2nd Gen BoS, 3.2 mm	5
RT-1892KESD	Fibreplast Head & Shoulder CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KSD	Fibreplast Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KYESD	Fibreplast Variable Perf, Head & Shoulder CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KYSD	Fibreplast VP HD+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892KYSDF	Fibreplast Open View Hd + Shdr 3.2 mm Variable Perf	10
RT-1892SD	Aquaplast RT Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892YESD	Aquaplast RT VP Hd+Shldr CURVE S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892YSD	Aquaplast RT VP Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm	10
RT-1892YSDR	Aquaplast RT Open Eye and Open Mouth Portrait S-frame Head and Shoulder	10
RT-1896K	Fibreplast Sheet, 24" x 36", 3.2 mm, Perf	5
RT-1969	Aquaplast RT Prone U-Frame, 4.8 mm	4
RT-1989S	Aquaplast RT Slim U-Frame, Std, 4.8 mm	4
RT-1989SO	Aquaplast RT Slim Org U-Frame, Std, 4.8 mm	4
RT-A782KSD	Fibreplast Hd+Shldr Portrait S-Frame, 2.4 mm, Std Perf with Integrated Shim	5
RT-A876KSDGLF	Fibreplast Open View Split Hd Only S-Frame, 3.2 mm, Micro Perf with Integrated Shim	5
RT-A889KYSD	Fibreplast VP Hd Only Portrait S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5
RT-A892KYSD	Fibreplast VP Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5
RT-A892KYSDF	Fibreplast Open View Hd+Shldr S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5
RT-A892YSD	Aquaplast RT VP Hd+Shldr Portrait S-Frame, 3.2 mm, Variable Perf with Integrated Shim	5



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2002890_NO_C
2024-02