
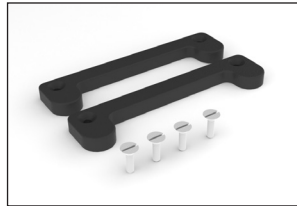
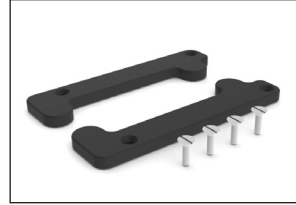
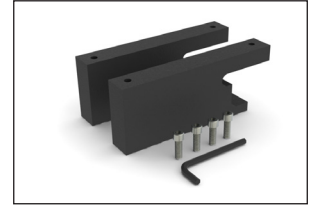
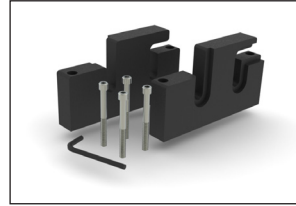
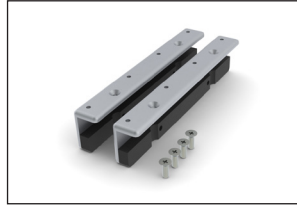
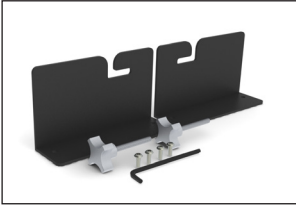
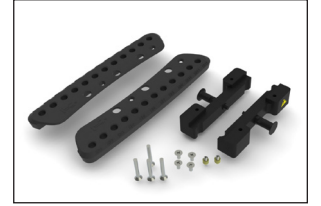
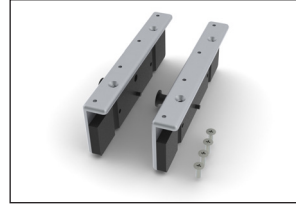
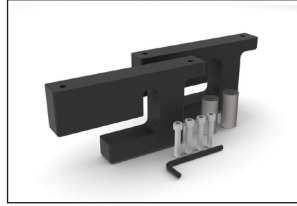


دليل التركيب ودليل المستخدم مهايئات التثبيت

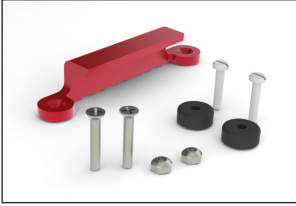

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Quantum و Portrait و AccuFix و Cantilever Board و CURVE و BoS و Encompass و Hand Grip Array هي علامات تجارية مسجلة لشركة Qfix.

Exact® و ETR® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Varian Medical Systems.

I-Beam Medical Intelligence، هي علامة تجارية مسجلة و Precise® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Elekta AB.

ZXT و TXT هي علامات تجارية مسجلة لشركة Siemens AG.

Med-Tec Prodigy و IPPS هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Civco Medical Solutions.

Gemini هي علامة تجارية مسجلة لشركة Philips Medical Systems.

Discovery هي علامة تجارية مسجلة لشركة GE Medical.

الاحتياطات العامة

بيانات تحذيرية

راجع موقع CQmedical.com للاطلاع على قائمة بالرموز وتعريفاتها.

! تحذير ! لا يُسمح بإجراء أي تعديلات على هذا الجهاز. إذا تعرض أي جزء من هذا الجهاز لحمل مدمر أو بدا تالفًا أو لا يعمل بشكل صحيح، فتوقف عن استخدامه فورًا وتواصل مع شركة CQ MEDICAL على الرقم +٧١٢,٧٣٧,٨٦٨٨ أو +٨٠٠,٨٤٢,٨٦٨٨ أو عبر البريد الإلكتروني SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

صُممت المهايئات لتناسب مع أجهزة BoS™ Headframeg، CURVE™ Boardg، Portrait™، AccuFix™ Cantilever Board™.

تحذير عام بشأن الاستخدام

ينبغي عدم تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم عند استخدام أحد مهايئات التصوير المقطعي المحوسب الآتية:


- ٤٥٢٧LTOMO-RT (الصفحة ٧)
- ٤٥٢٩M-RT (الصفحة ٢٠)
- ٤٥٢٧MTPCT-RT (الصفحة ٢٢)
- ٤٥٢٧EXA٤٧٥-RT (الصفحة ٣٤)
- ٤٥٢٧PETCT-RT (الصفحة ٣٦)

قد يؤدي تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم إلى سقوط الجهاز من السطح السريري الداعم، والتسبب في إصابة المريض.

إعداد المهائي

٤٥٢VLM1٣-RT

مهائي ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ والمعالجة المقطعية

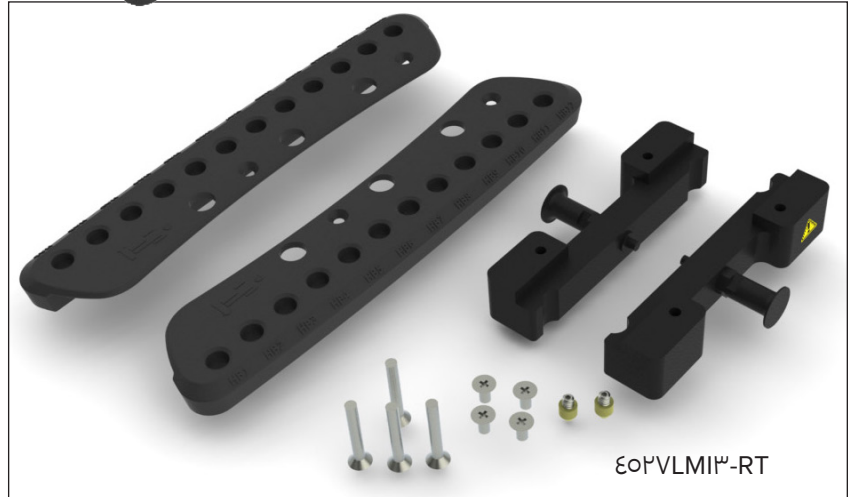

الأدوات اللازمة: مفك براغي برأس من Phillips

تحذير! توخ الحذر حيث يمكن حدوث منطقة انحصار بين مهائي الجهاز وبين السطح السريري الداعم عند وضع ضغط أعلى من خط التحذير.




إعداد المهائي


٤٥٢VLMI٣-RT

! ملاحظة ! إذا كنت تقوم بالتركيب في جهاز بسمك ٢٨ مم، مثل جهاز Encompass™، فراجع الصفحة ٣٨ لتركيب الحشوة قبل متابعة الإعداد.

١. ركب المهائيات في كل أداة Hand Grip Array باستخدام ٢ (في كل واحد) من البراغي بمقاسات ٢٠-٤١ x ٢١١ بوصة (الشكل ١).
٢. ركب مهائي تحديد الموضع ذا المخروط الأصفر مباشرة في أسفل الجهاز (ركب واحدًا في كل جهة). (الشكل ٢ و ٢a)
٣. ركب أدوات Hand Grip Arrays في الجهاز، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من ١ لبراغي (في كل واحد) بمقاسات ٢٠-٤١ x ٢١١ بوصة. (الشكل ٣)
- ! ملاحظة ! يمكن حدوث منطقة انحسار بين مهائي الجهاز وبين السطح السريري الداعم عند وضع الضغط أعلى من خط التحذير.
- ! ملاحظة ! للمزيد من المعلومات حول تركيب أدوات Hand Grip Arrays، راجع دليل المنتج ودليل المستخدم Hand Grip J Array.
٤. ركب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر محاذاة المخروط الأصفر مع ثقب التثبيت في أعلى السطح السريري الداعم. أدر المكبس واسحب لتركيب/تحرير الجهاز من السطح السريري الداعم.

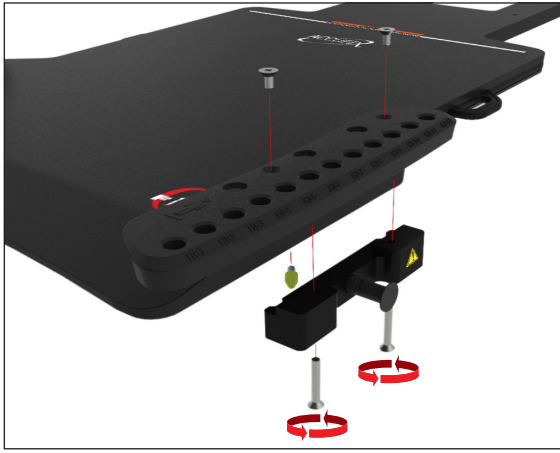


الشكل ١

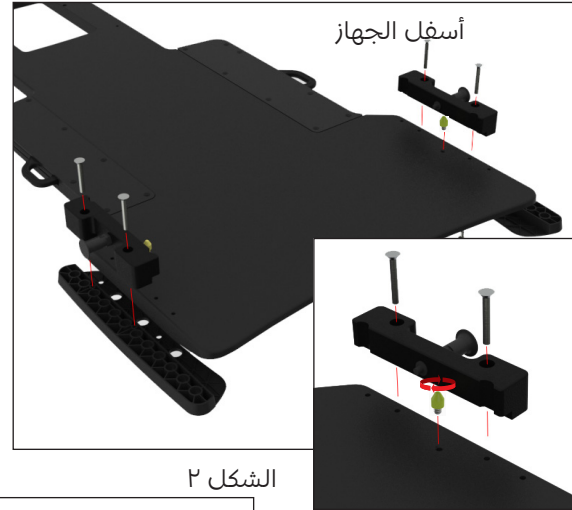

الشكل ٢

الشكل ٢a

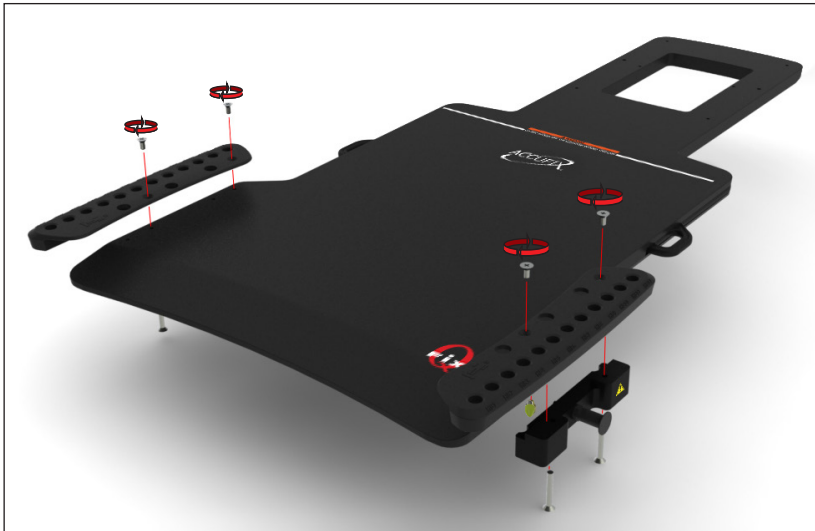

الشكل ٣

إعداد المهائي

٤٥٢VLTOMO-RT




! تحذير ! ينبغي عدم تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم عند استخدام هذا المهائي؛ فقد يؤدي ذلك إلى سقوط الجهاز من السطح السريري الداعم والتسبب في إصابة المريض.

إعداد المهائي

٤٥٢VLTOMO-RT

١. ركب مهائي تحديد الموضع ذا المخروط الأصفر مباشرة في أسفل الجهاز (ركب واحدًا في كل جهة) (الشكل ٤ و٥).
٢. ركب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر محاذاة المخروط الأصفر مع ثقب التثبيت في أعلى السطح السريري الداعم.

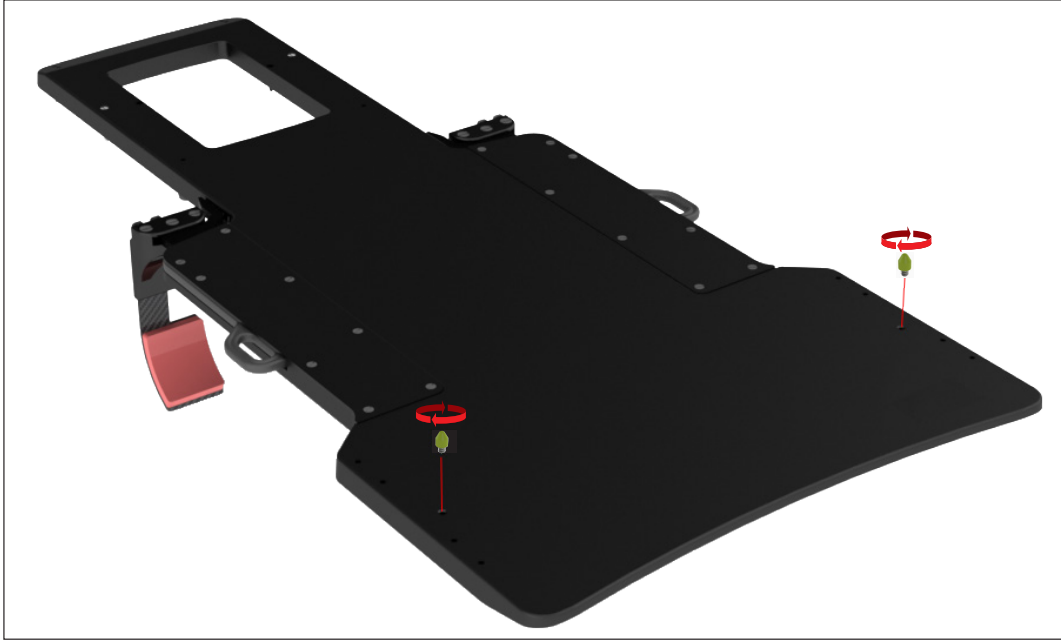

الشكل ٤



الشكل ٥


إعداد المهائي

٤٥٢VMI-RT

مهايء ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ والمعالجة المقطعية



٤٥٢VMI-RT
مخصصة للاستخدام
CURVE™ فقط مع
Board

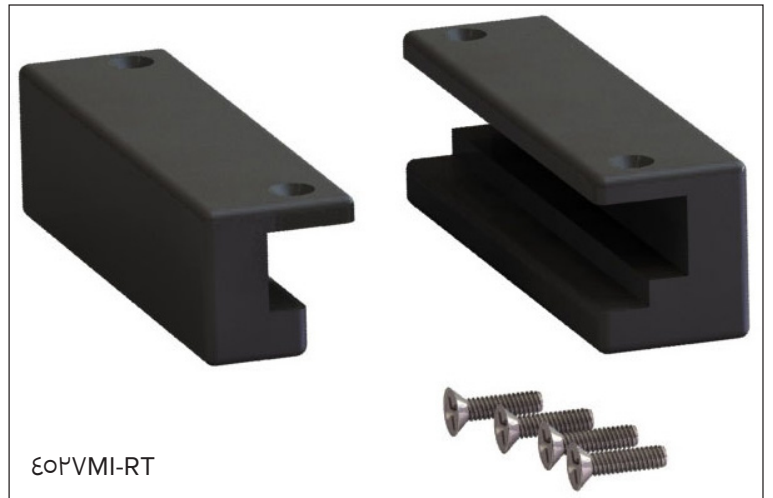

الأدوات اللازمة: مفك براغي برأس من Phillips




إعداد المهائي

٤٥٢VMI-RT

١. رُكِّبْ أيًا من المهائين في جانب واحد من الجهاز في الوضع الموضح أدناه، باستخدام ٢ من البراغي (في كل واحد) بمقاسات ٢٠-٤١ x ٢١ بوصة. (الشكل ٦)
٢. كرر الخطوات لتثبيت المهائي المقابل (الشكل ٧).
٣. ضع قضيب تحديد الموضع المزود بمسمارين (٢) في الموضع المطلوب (بمجرد التثبيت، ستكون مسامير قضيب تحديد الموضع محاذية للثقوب في أسفل الجهاز) (الشكل ٦ و ٧ و ٨).
٤. رُكِّبْ الجهاز في السطح السريري الداعم عبر تعليق الأكبر من المهائين أولاً في السطح السريري الداعم، ثم المهائي الأصغر، ورُكِّبْ الجهاز باستخدام قضيب تحديد الموضع المزود بمسمارين (٢).



الشكل ٦

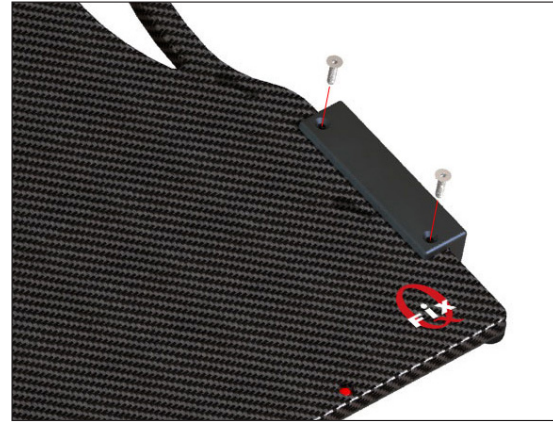

الشكل ٧




الشكل ٨

إعداد المهائي

٤٥٢VEXAG-RT

٥٥

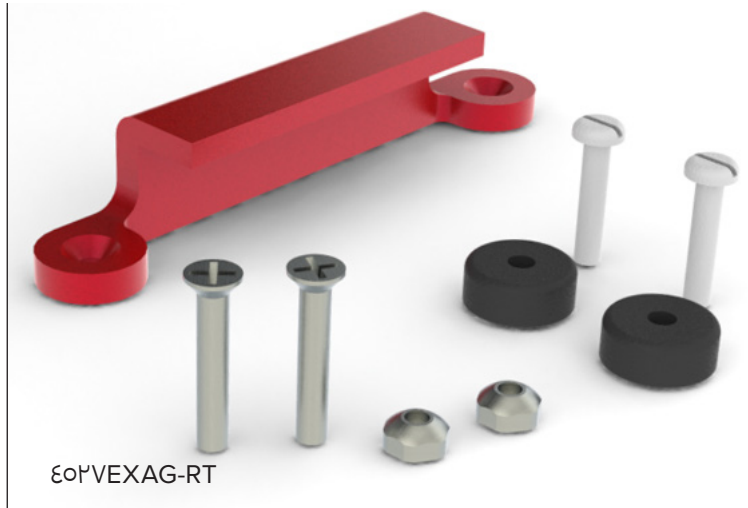

الأدوات اللازمة: مفك براغي برأس من Philips وبرأس مسطح

إعداد المهائي

٤٥٢VEXAG-RT

١. رُكِّب المهائي أحمر اللون في الجهاز، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من البراغي بمقاسات ٤١ x ٢٠ ٨٣ بوصة. ثم رُكِّب صامولتي (٢) الأمان مقاس ٤١-٢٠ في البرغي في الجانب العلوي من الجهاز (الشكل ٩).


! ملاحظة ! يمكن تركيب المهائي في الجانب الأيمن أو الأيسر من الجهاز. لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للمهائي.

٢. رُكِّب قرصتي (٢) تحديد الموضع في الجانب الآخر من مهائي تحديد الموضع، في الثقوب المقابلة، باستخدام برغي بمقاسات ٤١ x ٢٠ ٤١ بوصة (١ لكل واحد) (الشكل ١٠).

٣. رُكِّب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر تعليق المهائي أحمر اللون في أحد الجانبين، ثم ادفع الجانب الذي يحتوي على أقراص تحديد الموضع إلى أسفل داخل فتحات التثبيت حتى يستقر.



الشكل ٩

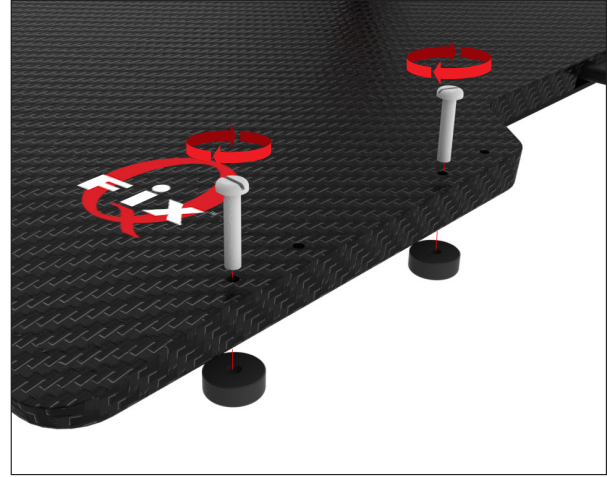

الشكل ١٠



الشكل ١١

إعداد المهائى

٤٥٢٧QFIX-RT

مهاىئات QUANTUM™ و QFIX™ KVUE™



الأدوات اللازمة: مفك براغى برأس من Philips وبرأس مسطح

إعداد المهائي


٤٥٢٧QFIX-RT

١. ركب المهائي في الجهاز، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصة)، باستخدام ٢ من البراغي بمقاسات ٤١-٢٠x ٤٣ بوصة. تأكد من أن جزء المهائي الذي يحتوي على الجزء البارز يواجه الداخل، حتى يمكن تثبيته في حافة جهاز Qfix (الشكل ١٢).


! ملاحظة ! يمكن تركيب المهائي في الجانب الأيمن أو الأيسر من الجهاز. لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للمهائي.

٢. ركب قرص (٢) تحديد الموضع في الجانب الآخر من مهائي تحديد الموضع، في الثقوب المقابلة، باستخدام برغي بمقاسات ٤١-٢٠x ٤١ بوصة (١ لكل واحد) (الشكل ١٣).

٣. ركب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر تعليق المهائي في أحد جانبي السطح السريري الداعم، ثم ادفع الجانب الذي يحتوي على أقراص تحديد الموضع إلى أسفل داخل فتحات التثبيت حتى يستقر.

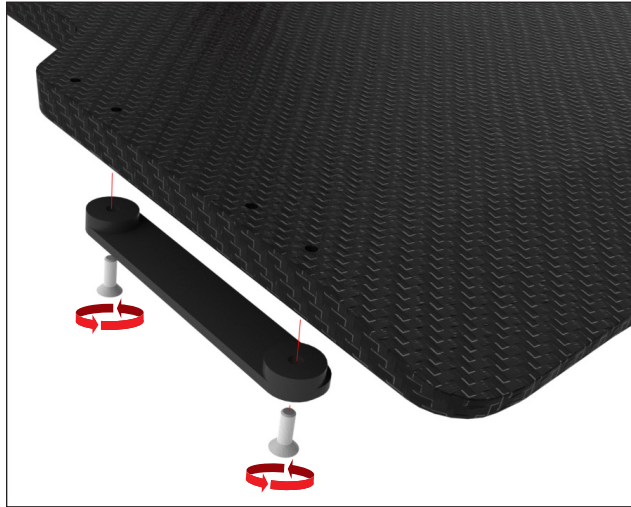

الشكل ١٢

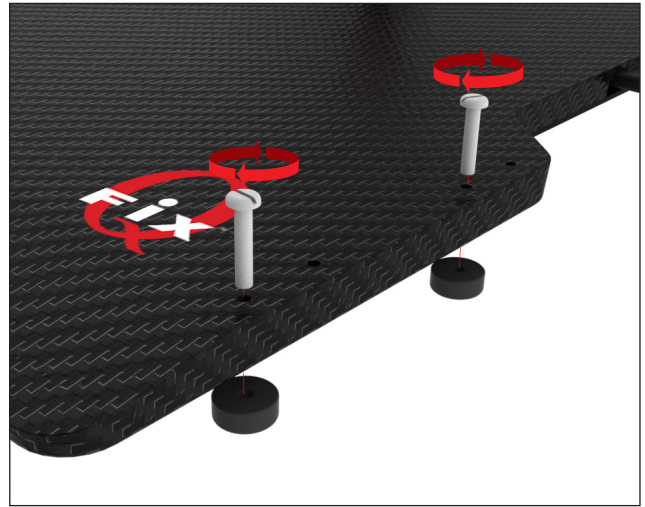

الشكل ١٣




الشكل ١٤

إعداد المهائ

٤٥٢VELK-RT

ELEKTA PRECISE®

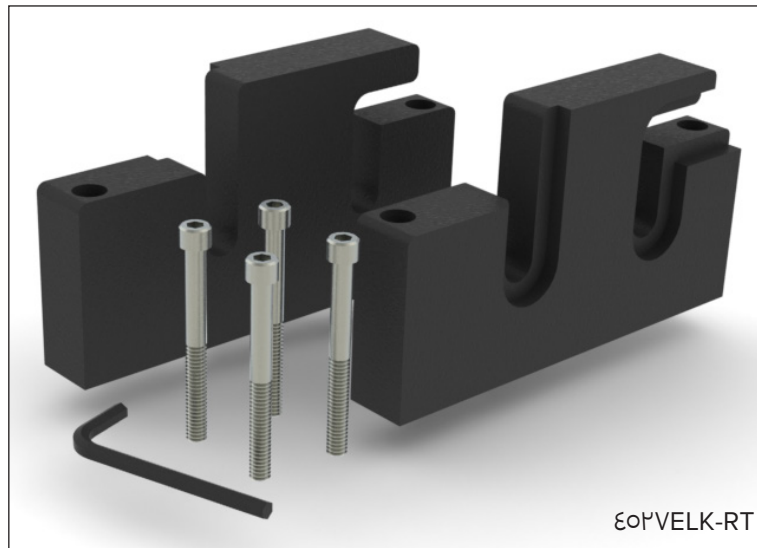

إعداد المهائي


٤٥٢VELK-RT

١. رُكِّب المهائي بحيث يكون السطح الناعم في الجزء الخارجي من الجهاز ويكون المهائي في الوضع الموضح أدناه، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من البراغي السدادة مقاس ٤١-٢٠ x ٢١ بوصة باستخدام مفتاح ألين المُرفق (الشكل ١٤).

! ملاحظة ! لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للمهائي.

٢. كرر الخطوات لتثبيت المهائي المقابل، مع الاحتفاظ بمواجهة الجانب الناعم من المهائي للخارج (الشكل ١٥).

٣. رُكِّب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر تعليق المهائي على المُباعد الموجود على القضيبين الملحقين.

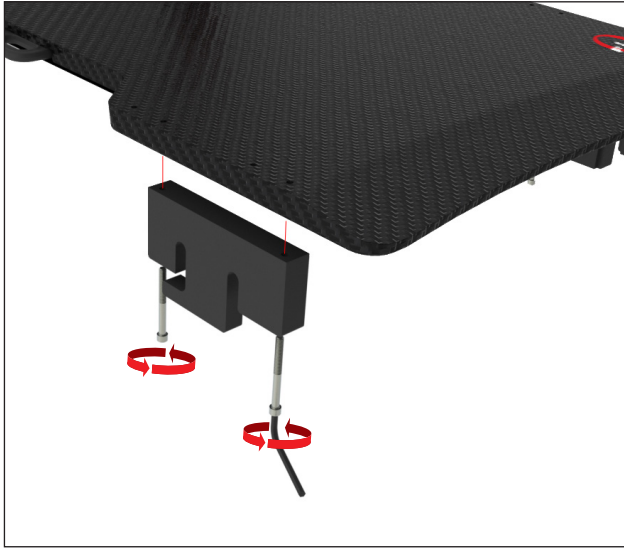

الشكل ١٥



الشكل ١٦



الشكل ١٧

إعداد المهائي

٤٥٢٩M-RT

التصوير المقطعي المحوسب المتوافق مع VARIAN EXACT®



الأدوات اللازمة: مفك براغي مسطح الرأس

ينبغي عدم تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم عند استخدام مهائي التصوير المقطعي المحوسب هذا. قد يؤدي تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم إلى سقوط الجهاز من السطح السريري الداعم، والتسبب في إصابة المريض.



إعداد المهائي


٤٥٢٩M-RT

١. رُكِّب قرص (٢) تحديد الموضع في أحد جانبي الجهاز، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصة) باستخدام براغي بمقاسات ٤١ x ٢٠-٤١ بوصة (١ في كل واحد) (الشكل ١٧).


! ملاحظة ! لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للأقراص.

٢. رُكِّب قرص (٢) تحديد الموضع المتبقيين في الجانب الآخر كما تم مع أول قرصين، في الثقوب المقابلة، باستخدام براغي بمقاسات ٤١ x ٢٠-٤١ بوصة (١ في كل واحد) (الشكل ١٨).

٣. رُكِّب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر محاذاة أقراص تحديد الموضع مع فتحات التثبيت. اضغط على الجهاز حتى يتم تثبيته.

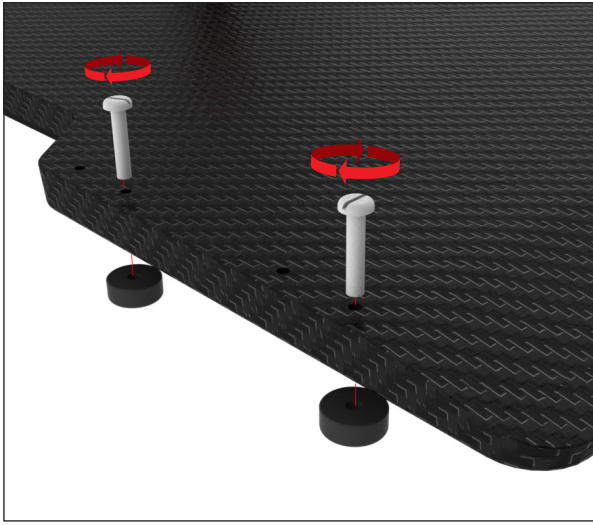

الشكل ١٨

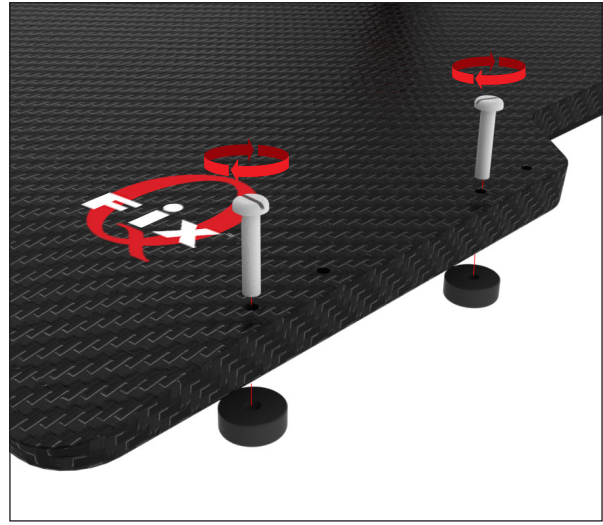


الشكل ١٩



الشكل ٢٠

إعداد المهائي ٤٥٢٧MTPCT-RT

جهاز التصوير المقطعي المحوسب SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

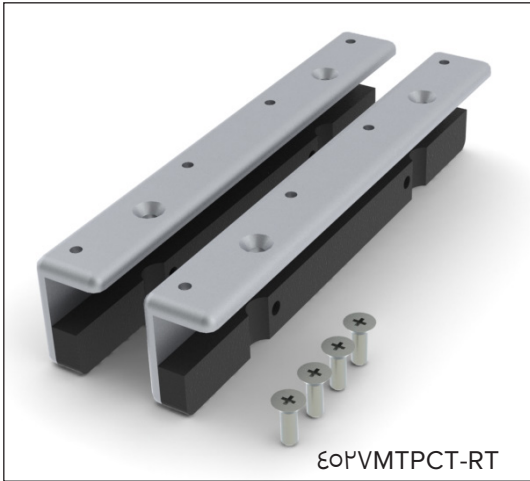


الأدوات اللازمة: مفك براغي برأس من Philips

⚠ ينبغي عدم تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم عند استخدام مهائي التصوير المقطعي المحوسب هذا. قد يؤدي تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم إلى سقوط الجهاز من السطح السريري الداعم، والتسبب في إصابة المريض.


إعداد المهائي

٤٥٢٧MTPCT-RT

١. ركب المهائي في الوضع الموضح أدناه، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من البراغي بمقاسات ٤١-٢٠ x ٤٣ بوصة (الشكلان ٢٠ و ٢١).
٢. **ملاحظة ! لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للمهائي.**
٣. أعد خطوات التركيب في الجانب الآخر من المهائي، مع الاحتفاظ بمواجهة الجانب السلس من المهائي للجانب الخارجي.
٣. ركب الجهاز عبر محاذاة المهائيات مع فتحات التثبيت على جوانب السطح السريري الداعم. اضغط على الجهاز حتى يتم تثبيته.

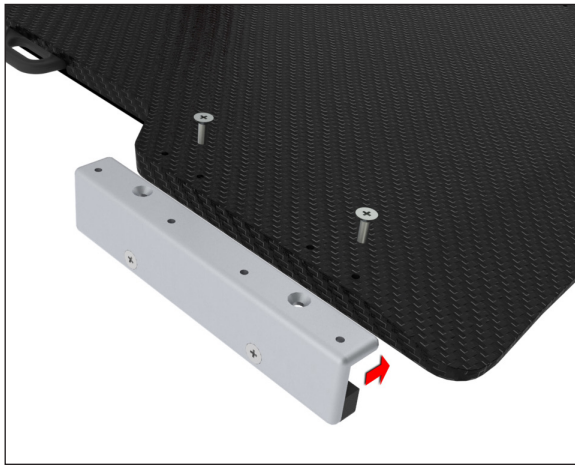

الشكل ٢١

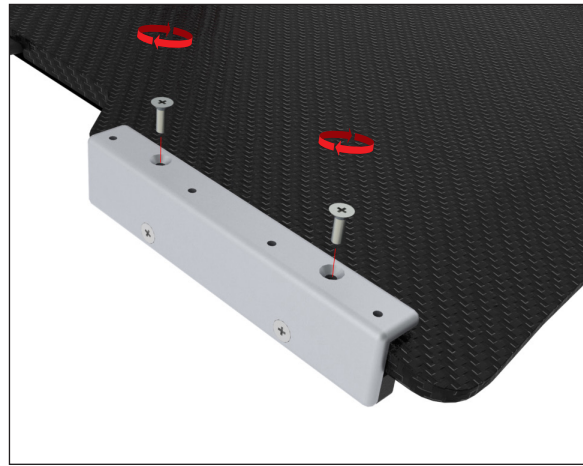

الشكل ٢٢




الشكل ٢٣

إعداد المهائي

٤٥٢VMTP-RT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

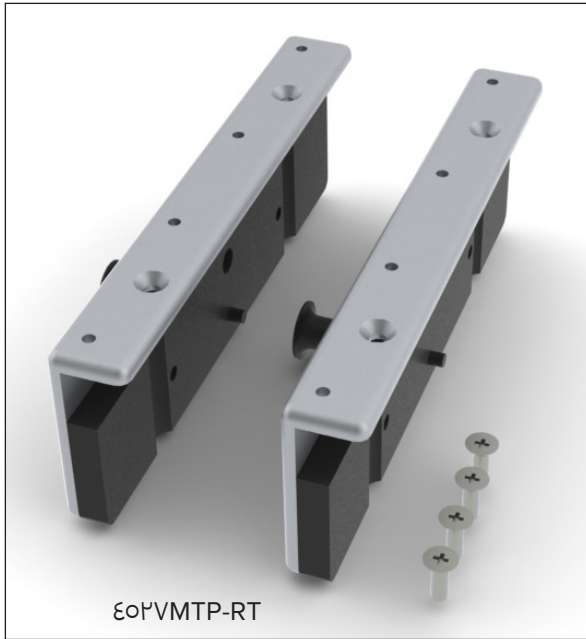

الأدوات اللازمة: مفك براغي برأس من Philips

إعداد المهائي

٤٥٢VMTP-RT

١. رُكِّب المهائي في الوضع الموضح أدناه، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من البراغي بمقاسات ٤١-٤٣ x ٢٠-٤٣ بوصة (الشكل ٢٤ و ٢٥).

! ملاحظة ! لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للمهائي.

٢. كرر الخطوات لتثبيت المهائي المقابل.

٣. رُكِّب الجهاز عبر محاذاة المهائيات مع فتحات التثبيت على جوانب السطح السريري الداعم. أدر المكبس واسحبه لتثبيت/تحرير الجهاز من السطح السريري الداعم.



الشكل ٢٤



الشكل ٢٥




الشكل ٢٦

إعداد المهائي

٤٥٢VIPS-RT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

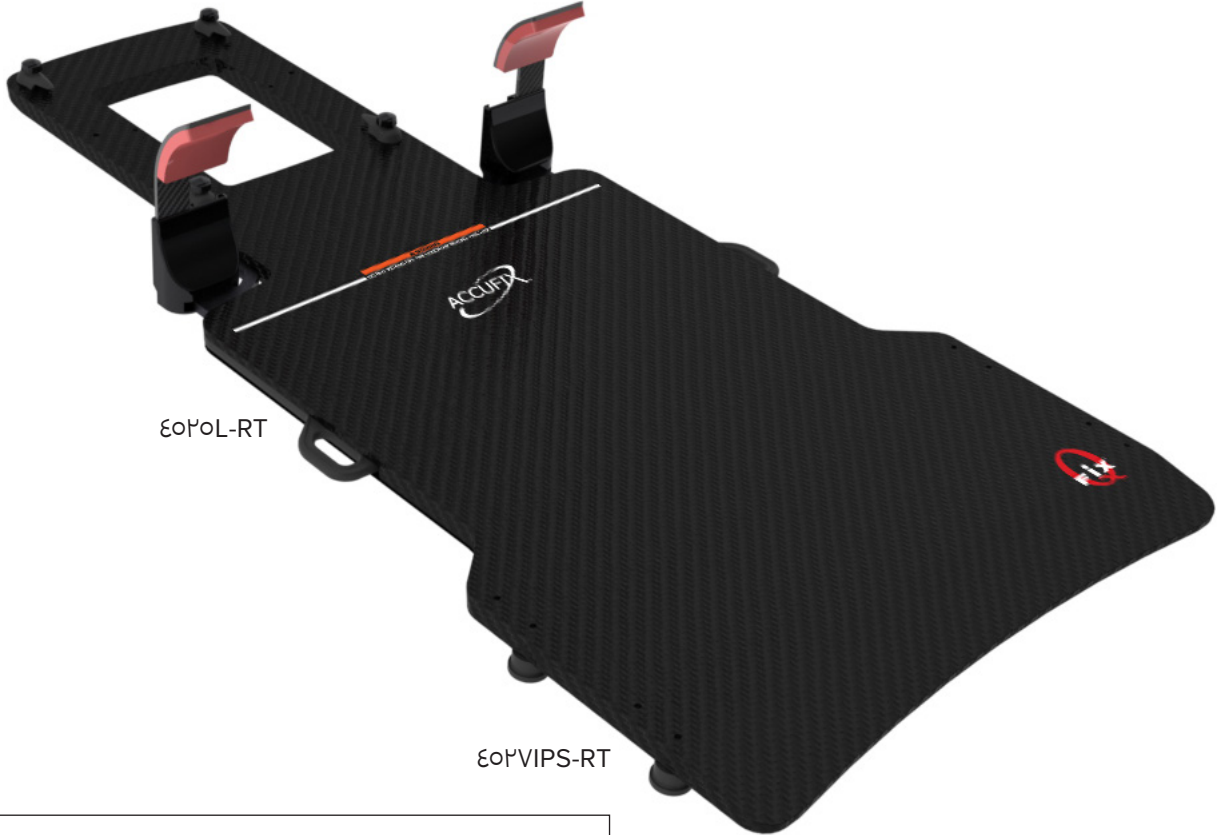

٤٥٢٥L-RT

٤٥٢VIPS-RT




٤٥٢VIPS-RT


إعداد المهائي

٤٥٢VIPS-RT

١. رُكِّب قرص (٢) تحديد الموضع (اللدان لهما حافة) في أحد جانبي الجهاز، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات) باستخدام براغي بمقاسات ٤١-٤١ x ٢٠ بوصة (١ في كل واحد) (الشكل ٢٧).
٢. رُكِّب قرص (٢) تحديد الموضع المتبقيين (من دون حافة) في الجانب الآخر كما تم مع أول قرصين، في الثقوب المقابلة، باستخدام براغي بمقاسات ٤١-٤١ x ٢٠ بوصة (١ في كل واحد) (الشكل ٢٨).
٣. رُكِّب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر محاذاة الأقراص مع فتحات التثبيت، ثم قم بتعلق الأقراص التي لها حافة في السطح السريري الداعم أولاً. اضغط على الجانب الآخر حتى يتم تثبيت الجهاز.

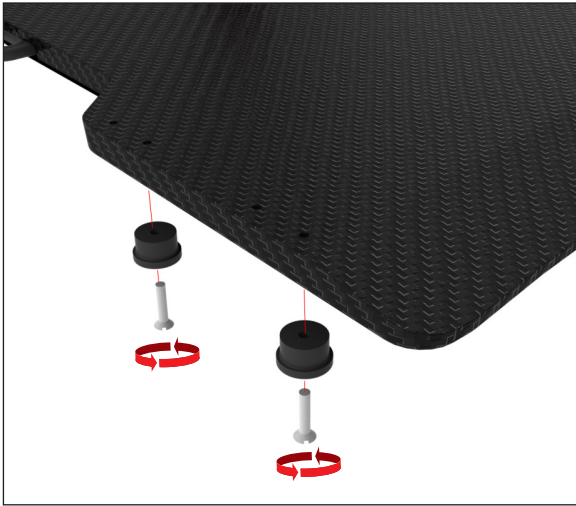

الشكل ٢٧

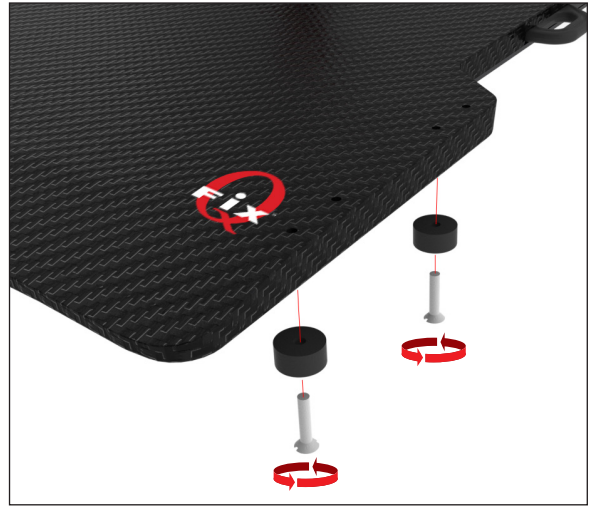

الشكل ٢٨




الشكل ٢٩

إعداد المهائي

٤٥٢VZXT-RT


SIEMENS ZXT

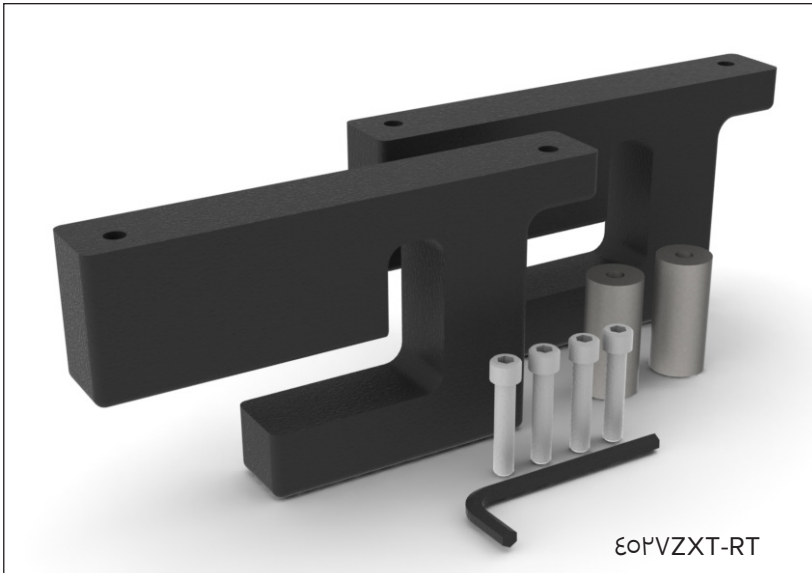


إعداد المهائي

٤٥٢VZXT-RT


١. استبدل المُباعِد المربع في السطح السريري الداعم ZXT بالمُباعِد الدائري المرفق. (الشكل ٣٠)
٢. رُكِّب المهائي في الوضع الموضح أدناه، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من البراغي السدادة بمقاسات ٤١ x ٢٠-٤١ بوصة باستخدام مفتاح ألين المرفق (الشكل ٣١).
٣. **ملاحظة ! يوجد مهائي أيمن وأيسر، تأكد من موازنة المهائي لجانب الجهاز بمجرد تركيبه. (الشكل ٣٢).**
ملاحظة ! لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للأقراص.
٤. كرر الخطوات لتركيب المهائي المقابل (الشكل ٣٣).
٥. رُكِّب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر تعليق المهائي على المُباعِد الموجود على القضيبين الملحقين (الشكل ٣٤).

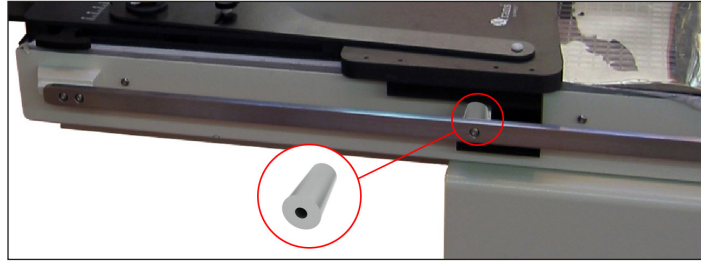


الشكل ٣٠

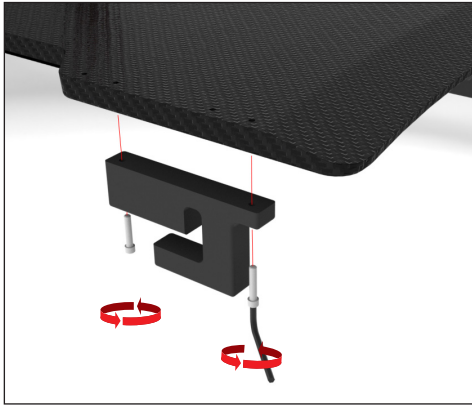

الشكل ٣١

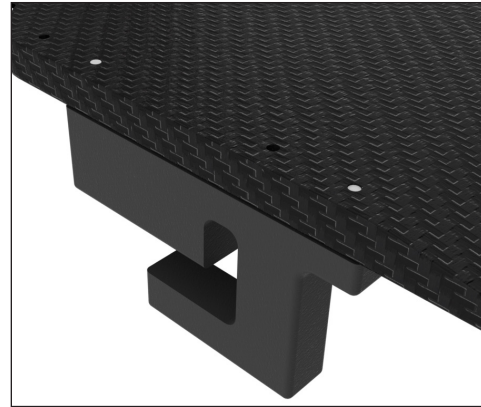

الشكل ٣٢

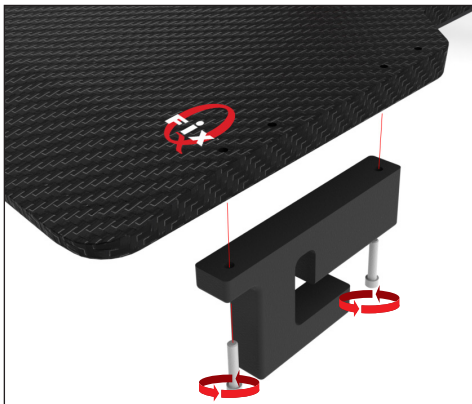

الشكل ٣٣




الشكل ٣٤

إعداد المهائي

٤٥٢VSKD-RT

SIEMENS KD

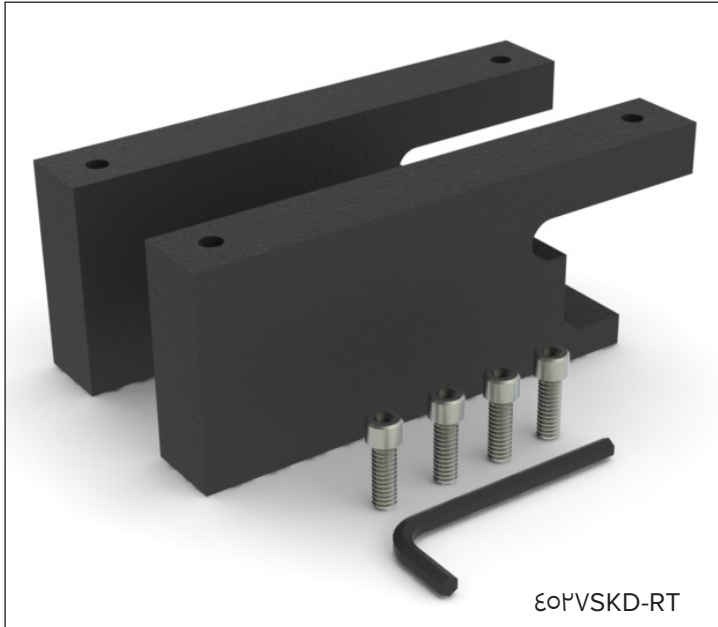

إعداد المهائي


٤٥٢VSKD-RT

١. رُكِّب المهائي في الوضع الموضح أدناه، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من البراغي السدادة بمقاسات ٤١-٢٠ x ٤٣ بوصة باستخدام مفتاح ألين المرفق (الشكل ٣٥).


! ملاحظة ! يوجد مهائي أيمن وأيسر، تأكد من موازنة المهائي لجانب الجهاز بمجرد تركيبه. (الشكل ٣٦)
! ملاحظة ! لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للأقراص.

٢. كرر الخطوات لتركيب المهائي المقابل (الشكل ٣٧).

٣. رُكِّب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر تعليق المهائي على المبعاد الموجود على القضيبين الملحقين.

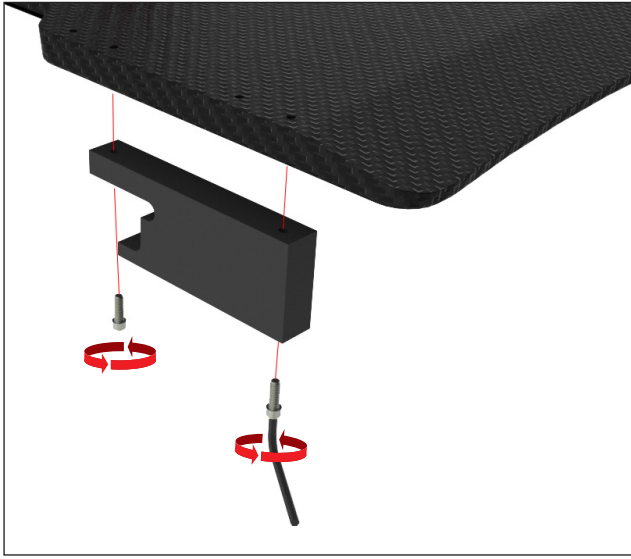

الشكل ٣٥

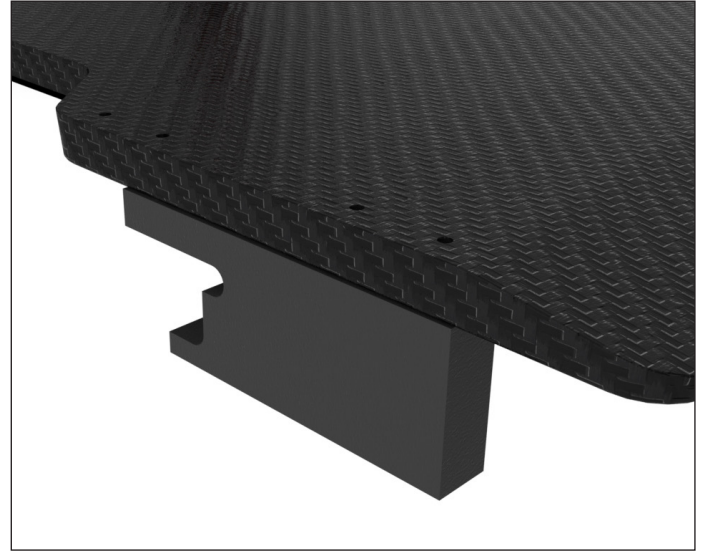

الشكل ٣٦



الشكل ٣٧



الشكل ٣٨

إعداد المهائي


٤٥٢VETRJ-RT

VARIAN ETR



٤٥٢٥L-RT

٤٥٢VETRJ-RT

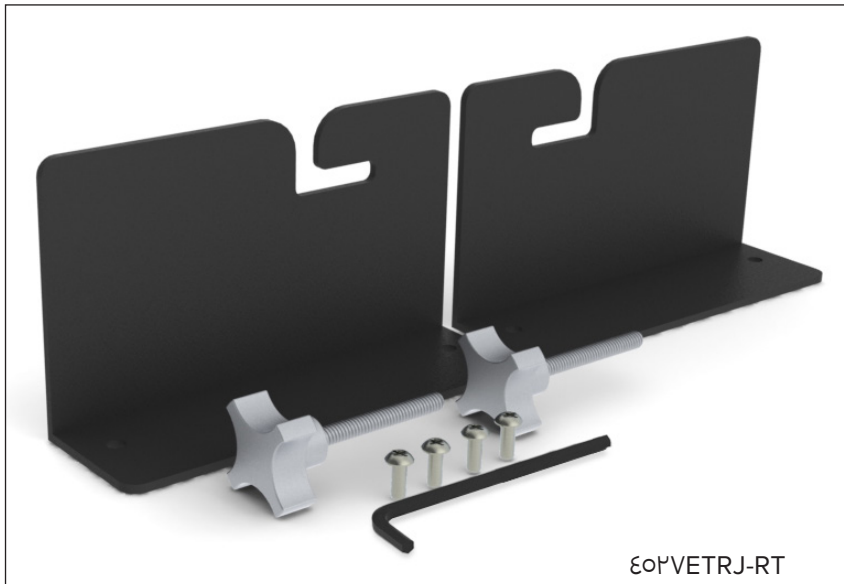

٤٥٢VETRJ-RT

إعداد المهائي

٤٥٢VETR-J-RT


١. أزل برغي ألين الثالث من الطرف العلوي للسطح السريري الداعم ETR باستخدام مفتاح ألين المرفق. (الشكل ٣٩).
٢. كرر الخطوات في الجانب المقابل من السطح السريري الداعم.
٣. استبدل برغي ألين بالمقبض المرفق. يجب أن يبقى هذا المقبض جزءًا دائمًا من السطح السريري الداعم. لا تحكم تثبيت المقبض بالكامل؛ واترك مسافة تبلغ ٥ سم تقريبًا (الشكل ٤٠).
٤. كرر الخطوات في الجانب المقابل من السطح السريري الداعم.
٥. ركب المهائي في الوضع الموضح أدناه، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من البراغي بمقاسات ٤١ x ٢١ بوصة (الشكل ٤١).
٦. كرر الخطوات لتثبيت المهائي المقابل (الشكل ٤٢).
٧. ركب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر تعليق المهائي في عمود المقبض. أحكم تثبيت المقبض. (الشكل ٤٣)




الشكل ٣٩




الشكل ٤٠

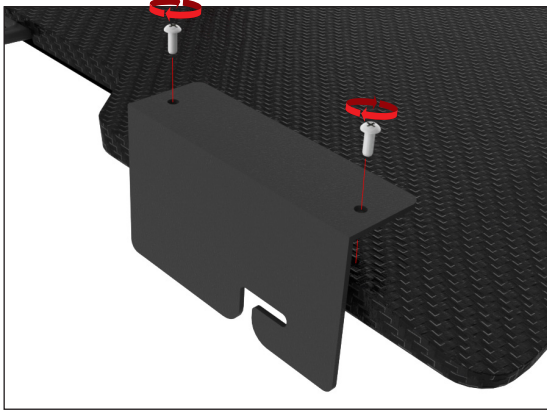

الشكل ٤١

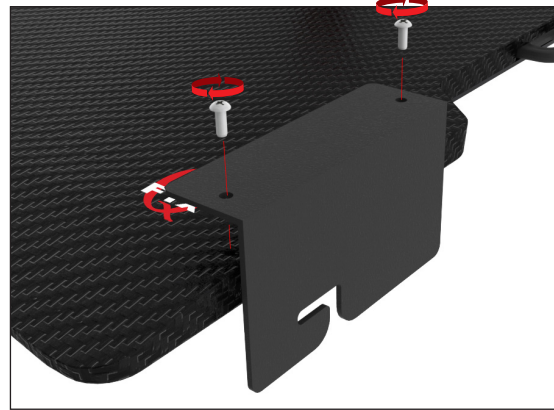

الشكل ٤٢

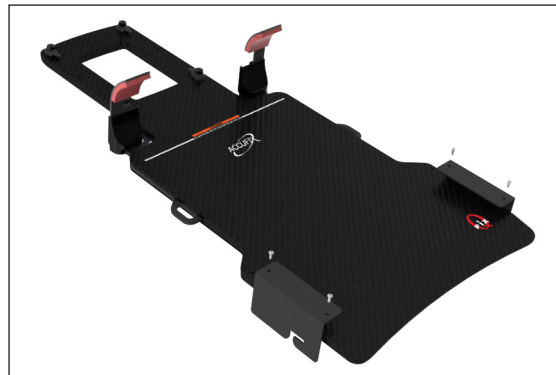

الشكل ٤٣


إعداد المهائي ٤٥٢VEXA٤٧٥-RT

دعامة التصوير المقطعي المحوسب المثبتة بتصميم NARROW EXACT® وعرض ٥٠٠ مم



٤٥٢٥L-RT

٤٥٢VEXA٤٧٥-RT

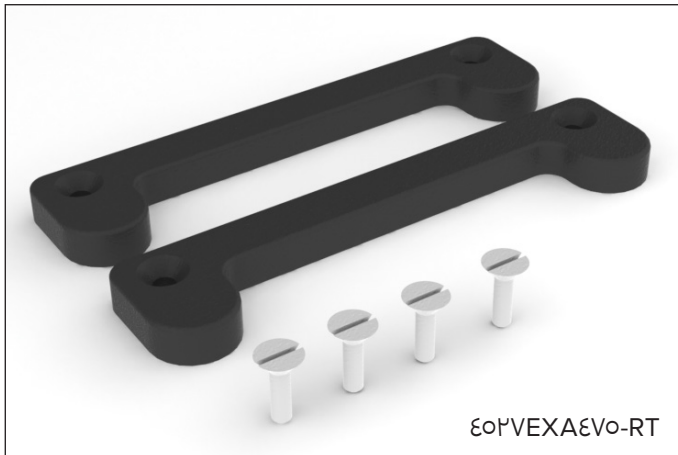

٤٥٢VEXA٤٧٥-RT

الأدوات اللازمة: مفك براغي مسطح الرأس

ينبغي عدم تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم عند استخدام مهائي التصوير المقطعي المحوسب هذا. قد يؤدي تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم إلى سقوط الجهاز من السطح السريري الداعم، والتسبب في إصابة المريض.



إعداد المهائي


٤٥٢VEXA٤٧٥-RT

١. رُكِّب المهائي في الوضع الموضح أدناه، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من البراغي بمقاسات ٤١-٢٠ x ٤٣ بوصة (الشكل ٤٤).

! ملاحظة ! لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للأقراص.

٢. كرر الخطوات لتثبيت المهائي المقابل (الشكل ٤٥).

٣. رُكِّب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر محاذاة المهايئات مع فتحات التثبيت. اضغط على الجهاز حتى يتم تثبيته.

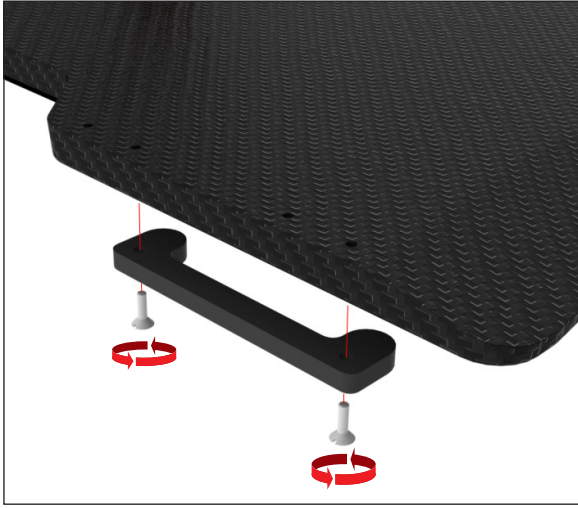

الشكل ٤٤




الشكل ٤٥



الشكل ٤٦


إعداد المهائي ٤٥٢VPETCT-RT

دعامة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني/التصوير المقطعي المحوسب
عرض ٤٨٠ مم PHILIPS GEMINI™ و GE DISCOVERY™

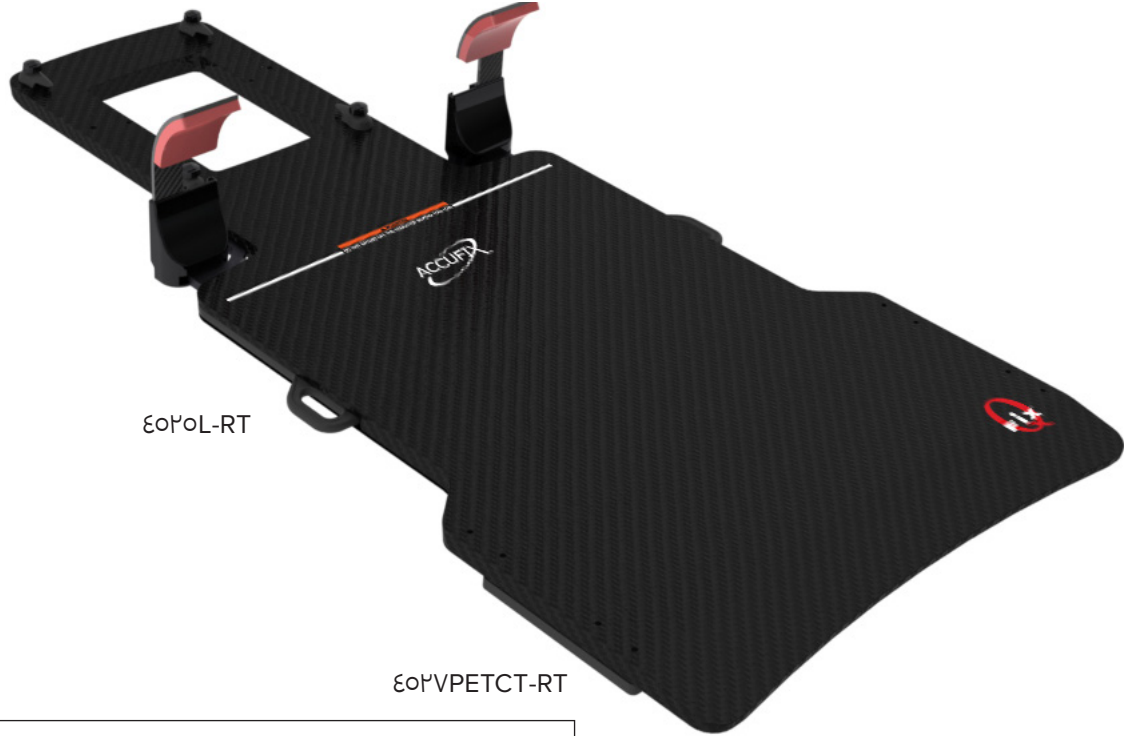

٤٥٢٥L-RT

٤٥٢VPETCT-RT

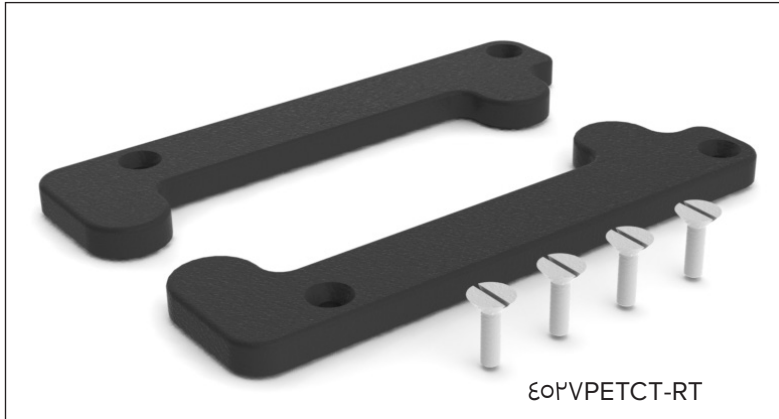

٤٥٢VPETCT-RT

الأدوات اللازمة: مفك براغي مسطح الرأس

ينبغي عدم تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم عند استخدام مهائي التصوير المقطعي المحوسب هذا. قد يؤدي تثبيت الجهاز بحيث يتجاوز أحد طرفيه حافة السطح السريري الداعم إلى سقوط الجهاز من السطح السريري الداعم، والتسبب في إصابة المريض.



إعداد المهايئ


٤٥٢VPETCT-RT

١. رُكِّب المهايئ في الوضع الموضح أدناه، في ثقبين متباعدين بمسافة ١٤٠ مم (٥,٥ بوصات)، باستخدام ٢ من البراغي بمقاسات ٤١-٥٢ x ٤٣ بوصة (الشكل ٤٧).


! ملاحظة ! لا يهم أي مجموعة من الثقوب يتم استخدامها، ولكن إذا كانت أدوات Hand Grip Array مثبتة، فاستخدم مجموعة الثقوب المتاحة للأقراص.

٢. كرر الخطوات لتثبيت المهايئ المقابل (الشكل ٤٨).

٣. رُكِّب الجهاز في السطح السريري الداعم عبر محاذاة المهايئات مع فتحات التثبيت. اضغط على الجهاز حتى يتم تثبيته.

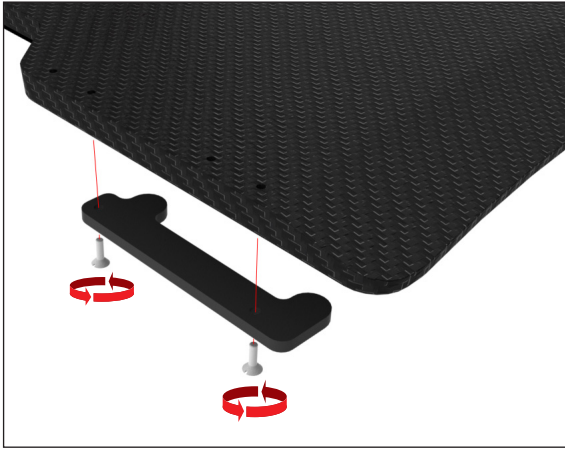

الشكل ٤٧

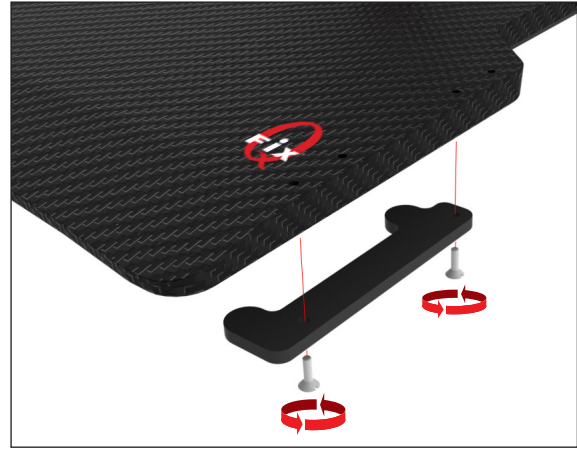

الشكل ٤٨



الشكل ٤٩

تركيب الحشوة

٤٥٢VPETCT-RT

٤٥٢VEXA-RT (الشكل ٥٠)

١. انزع البرغيتين (٢) اللذين يثبتان المهائى بأداة Hand Grip Array.
٢. ضع الحشوة بين المهائى وأداة hand grip array، مع محاذاة ثقوب البراغى مع الثقوب الموجودة في الحشوة.
٣. أعد تركيب البرغيتين إلى أن يصبحا محكمي الربط.
٤. تابع تعليمات الإعداد.

٤٥٢VLM1٣-RT (الشكل ٥١)

١. انزع البرغيتين (٢) اللذين يثبتان المهائى بأداة Hand Grip Array.
٢. ضع الحشوة بين المهائى وأداة hand grip array، مع محاذاة ثقوب البراغى مع الثقوب الموجودة في الحشوة.
٣. أعد تركيب البرغيتين إلى أن يصبحا محكمي الربط.
٤. تابع تعليمات الإعداد.



الشكل ٥٠



الشكل ٥١



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com