
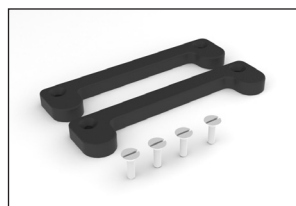
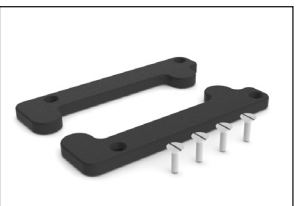
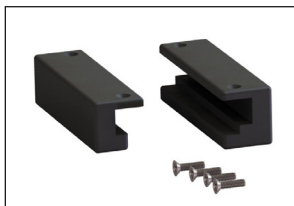
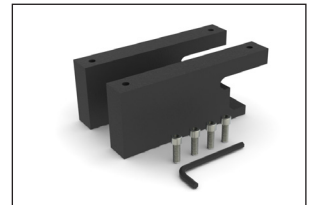
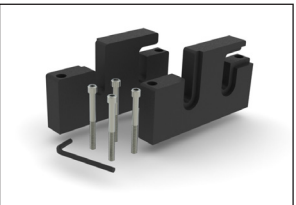
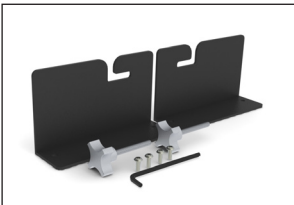
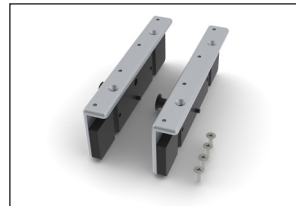


MONTAGEANLEITUNG UND BEDIENERHANDBUCH

Verstelladapter

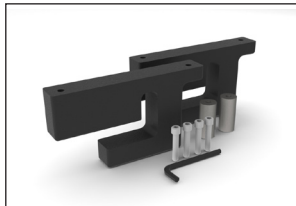

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass und Hand Grip Array sind Handelsmarken von Qfix.

Exact® und ETR® sind eingetragene Handelsmarken von Varian Medical Systems.

Medical Intelligence I-Beam ist eine Handelsmarke und Precise® ist eine eingetragene Handelsmarke von Elekta AB.

ZXT und TXT sind Handelsmarken der Siemens AG.

Med-Tec Prodigy und IPPS sind Handelsmarken von Civco Medical Solutions.

Gemini ist eine Handelsmarke von Philips Medical Systems.

Discovery ist eine Handelsmarke von GE Medical.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

WARNHINWEISE

Eine Auflistung der Symbole und ihrer Definitionen kann unter CQmedical.com abgerufen werden.

! WARNUNG ! DIESE VORRICHTUNG DARF NICHT MODIFIZIERT WERDEN. FALLS IRGEND EIN TEIL DIESER VORRICHTUNG EINER BEDENKLICH HOHEN LAST AUSGESETZT WURDE, ANSCHEINEND BESCHÄDIGT IST ODER NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, BRECHEN SIE DIE VERWENDUNG UNVERZÜGLICH AB UND SETZEN SIE SICH MIT CQ MEDICAL UNTER +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ODER SUPPORT@CQMEDICAL.COM IN VERBINDUNG.

Die Adapter sind für die Verwendung mit den Vorrichtungen Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, CURVE™ Board und BoS™ Headframe vorgesehen.

ALLGEMEINER WARNHINWEIS

Die Vorrichtung darf bei Verwendung der folgenden CT-Adapter NICHT freitragend über das Ende der Tischplatte geführt werden:

- RT-4527LTOMO (S. 7)
- RT-4529M (S. 20)
- RT-4527MTPCT (S. 22)
- RT-4527EXA475 (S. 34)
- RT-4527PETCT (S. 36)

Wenn die Vorrichtung freitragend über das Ende der Tischplatte geführt wird, kann sie von der Tischplatte fallen und den Patienten verletzen.


EINRICHTUNG DES ADAPTERS RT-4527LMI3

ELEKTA / MEDICAL
TOMOTHERAPIE-ADAPTER

INTELLIGENCE

I-BEAM™

UND

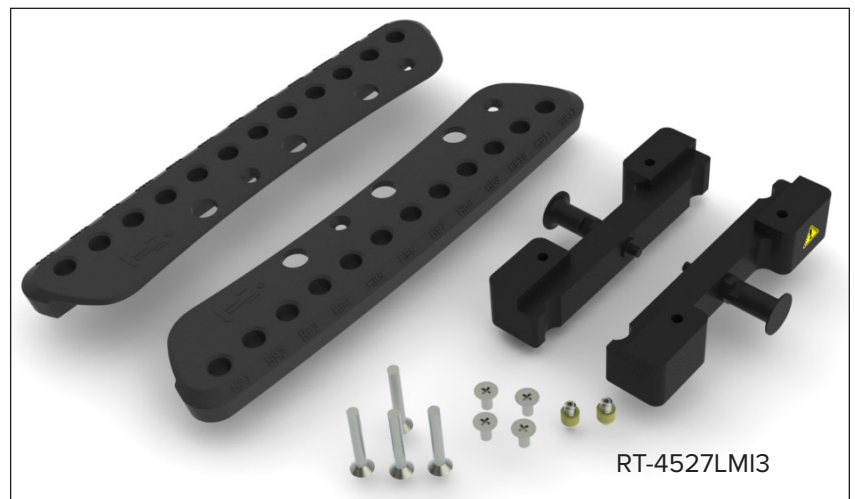

Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher



! WARNUNG ! ES BESTEHT DIE GEFAHR, DASS ZWISCHEN DEM ADAPTER UND DER TISCHPLATTE EIN QUETSCHPUNKT ENTSTEHT, WENN DER DRUCK OBERHALB DER WARNLINIE AUSGEÜBT WIRD.

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527LMI3

! HINWEIS ! Bei der Montage auf einer Vorrichtung mit einer Dicke von 28 mm, wie z. B. Encompass™, beachten Sie die Anweisungen auf Seite 38 zur Montage von Ausgleichsscheiben, bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren.

1. Befestigen Sie die Adapter an jedem Hand Grip Array mit jeweils 2 ¼-20 x 1 ½-Zoll-Schrauben (Abb. 1).
2. Den gelben konischen Ausrichtungsadapter direkt an der Unterseite der Vorrichtung anbringen (jeweils einen auf jeder Seite). (Abb. 2 und 2a)
3. Befestigen Sie die Hand Grip Arrays an der Vorrichtung in zwei Löchern im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit jeweils zwei (2) ¼-20 x ½-Zoll-Schrauben. (Abb. 3)

! HINWEIS ! Zwischen dem Adapter und der Tischplatte kann ein Quetschpunkt entstehen, wenn der Druck oberhalb der Warnlinie ausgeübt wird.

! HINWEIS ! Weitere Informationen zur Montage der Hand Grip Arrays sind im Hand Grip Array Produktführer und Bedienerhandbuch enthalten.

4. Richten Sie die Vorrichtung an der Tischplatte aus, indem Sie den gelben Kegel an den Indexierungslöchern auf der Oberseite der Tischplatte ausrichten. Drehen und ziehen Sie den Kolben, um die Vorrichtung auf der Tischplatte zu befestigen/freizugeben.

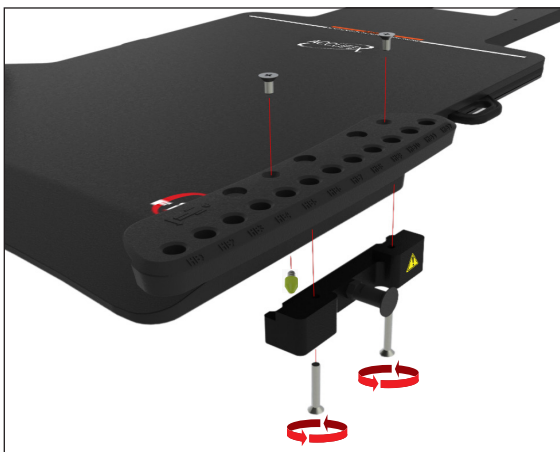


Abb. 1

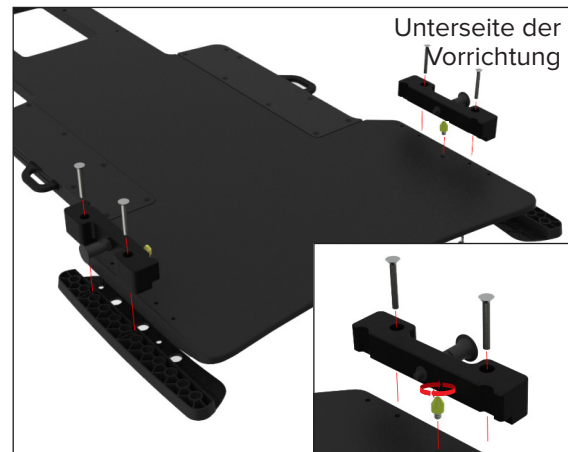


Abb. 2

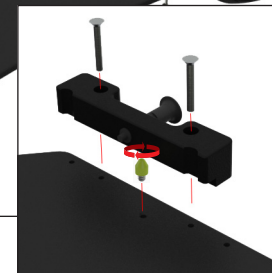


Abb. 2a

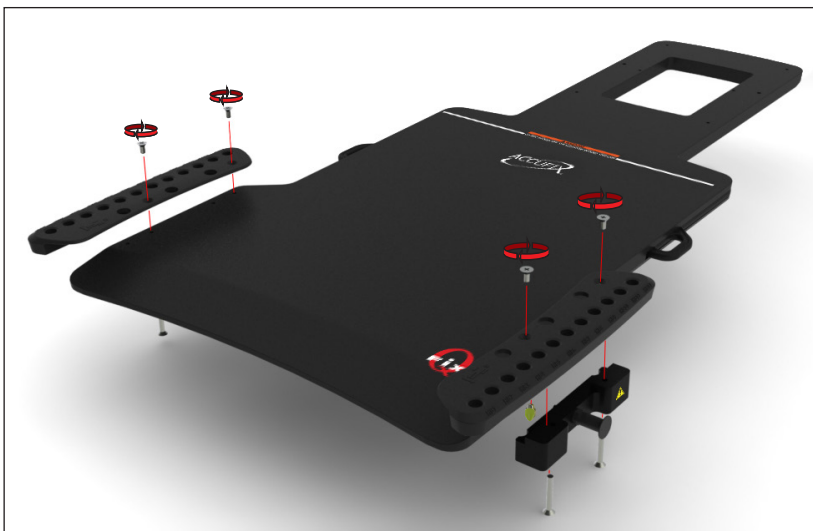


Abb. 3

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527LTOMO



! WARNUNG ! DIE VORRICHTUNG DARF BEI VERWENDUNG DIESES ADAPTERS *NICHT* FREITRAGEND ÜBER DAS ENDE DER TISCHPLATTE GEFÜHRT WERDEN, DA SIE SONST VON DER TISCHPLATTE FALLEN UND DEN PATIENTEN VERLETZEN KANN.

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527LTOMO

1. Den gelben konischen Ausrichtungsadapter direkt an der Unterseite der Vorrichtung anbringen (jeweils einen auf jeder Seite) (Abb. 4 und 5).
2. Richten Sie die Vorrichtung an der Tischplatte aus, indem Sie den gelben Kegel an den Indexierlöchern auf der Oberseite der Tischplatte ausrichten.

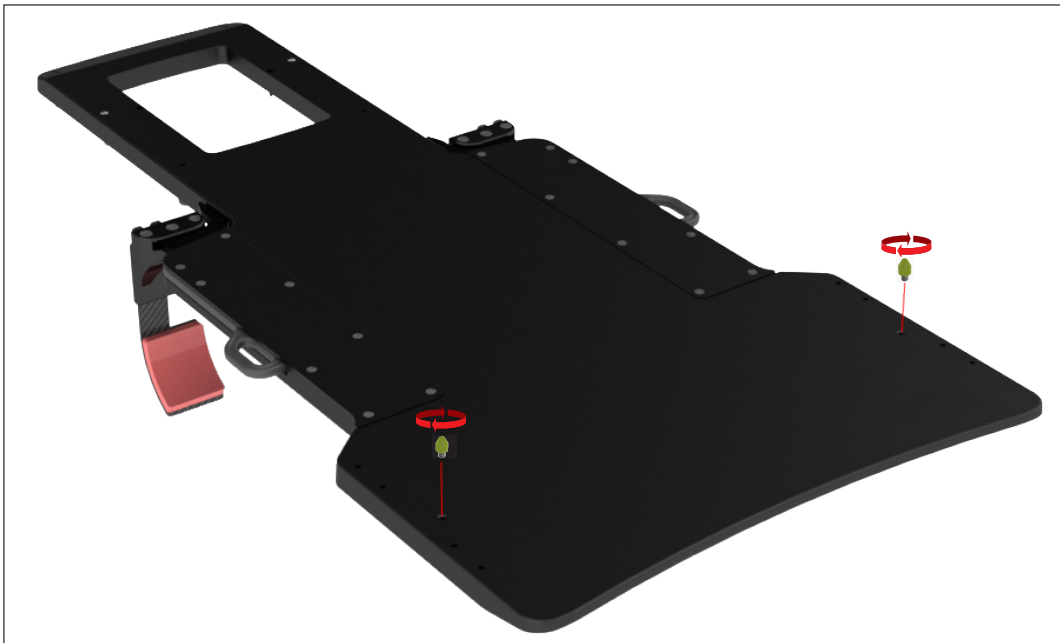


Abb. 4

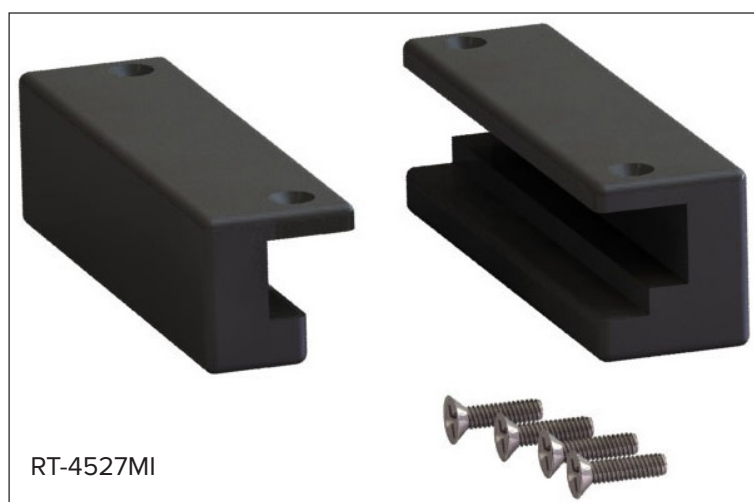


Abb. 5

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527MI

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ UND
TOMOTHERAPIE-ADAPTER



Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527MI

1. Befestigen Sie die beiden Adapter an einer Seite der Vorrichtung in der unten gezeigten Position mit jeweils zwei (2) ¼-20 x ½-Zoll-Schrauben. (Abb. 6)

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für den Adapter.

2. Wiederholen Sie die Montage für den gegenüberliegenden Adapter. (Abb. 7).
3. Platzieren Sie die 2-Stift-Indexschiene in der gewünschten Position (nach der Befestigung sind die Stifte der Indexschiene mit den Löchern an der Unterseite der Vorrichtung ausgerichtet) (Abb. 6, 7 und 8).
4. Bringen Sie die Vorrichtung an der Tischplatte an, indem Sie zuerst den größeren der beiden Adapter und dann den kleineren Adapter an der Tischplatte einhaken. Fixieren Sie die Vorrichtung mithilfe der 2-Stift-Indexschiene.

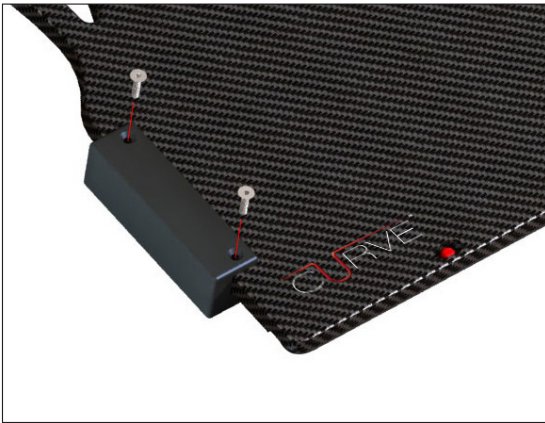


Abb. 6

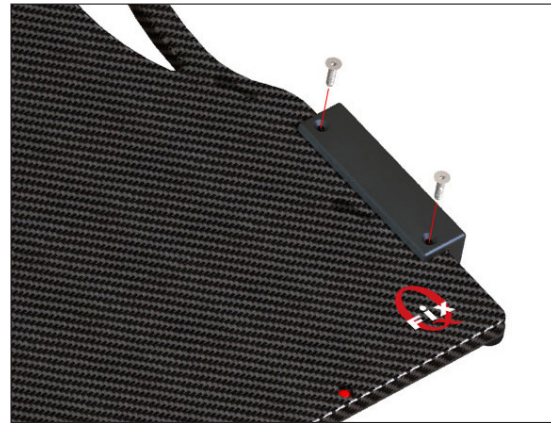


Abb. 7

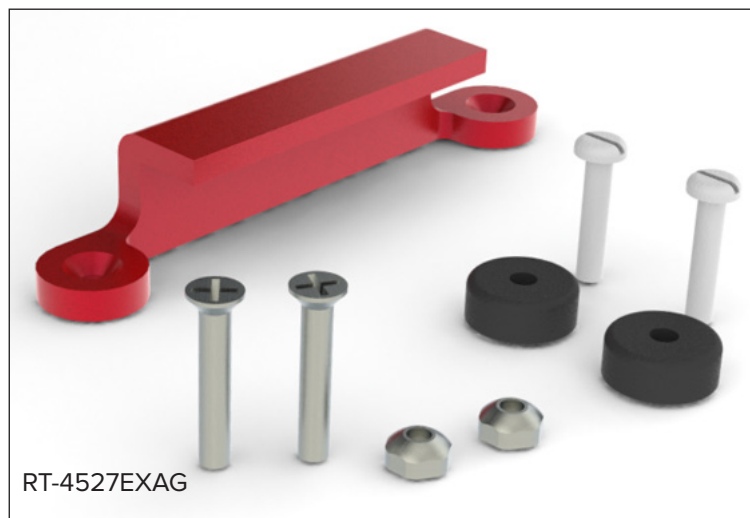


Abb. 8

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527EXAG

VARIAN EXACT® ADAPTER



Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527EXAG

1. Befestigen Sie den roten Adapter an der Vorrichtung in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit zwei (2) ¼-20 x ⅜-Zoll-Schrauben. Befestigen Sie dann die zwei (2) ¼-20-Sicherheitsmutter an den Schrauben auf der Oberseite der Vorrichtung (Abb. 9).

! HINWEIS ! Der Adapter kann auf der rechten oder linken Seite der Vorrichtung montiert werden. Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für den Adapter.

2. Befestigen Sie die 2 Zentrierscheiben auf der gegenüberliegenden Seite des Ausrichtungssadapters in den entsprechenden Löchern mit jeweils einer (1) ¼-20 x 1 ¼-Zoll-Schraube (Abb. 10).
3. Befestigen Sie die Vorrichtung auf der Tischplatte, indem Sie den roten Adapter an einer Seite einhaken und die Seite mit den Zentrierscheiben nach unten in die Indexkerben drücken, bis sie fest sitzt.



Abb. 9

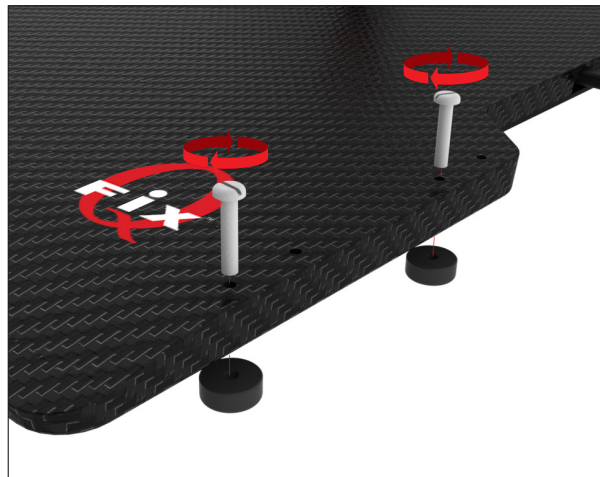


Abb. 10



Abb. 11

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527QFIX

QFIX™ KVUE™ UND QUANTUM™ ADAPTER



Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitz- und
Schlitzschraubendreher

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527QFIX

1. Befestigen Sie den Adapter an der Vorrichtung in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit zwei (2) ¼-20 x ¾-Zoll-Schrauben. Der Adapter muss mit dem überstehenden Teil nach innen zeigen, damit er am Rand der Qfix Vorrichtung einrasten kann (Abb. 12).

! HINWEIS ! Der Adapter kann auf der rechten oder linken Seite der Vorrichtung montiert werden. Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für den Adapter.

2. Befestigen Sie die 2 Zentrierscheiben auf der gegenüberliegenden Seite des Ausrichtungssadapters in den entsprechenden Löchern mit jeweils einer (1) ¼-20 x 1 ¼-Zoll-Schraube (Abb. 13).
3. Befestigen Sie die Vorrichtung auf der Tischplatte, indem Sie den Adapter an einer Seite der Tischplatte einhaken und die Seite mit den Zentrierscheiben nach unten in die Indexkerben drücken, bis sie fest sitzt.



Abb. 12

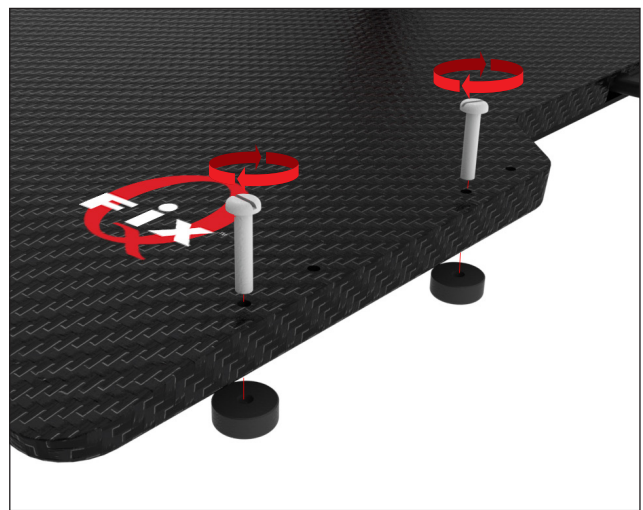


Abb. 13



Abb. 14

EINRICHTUNG DES ADAPTERS


RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®



RT-4525L

RT-4527ELK

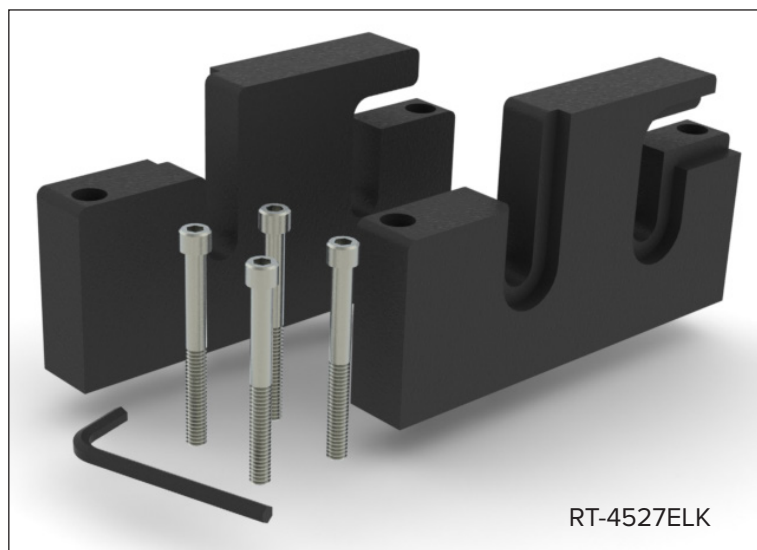

RT-4527ELK

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527ELK

1. Befestigen Sie den Adapter so, dass sich die glatte Oberfläche an der Außenseite der Vorrichtung befindet und der Adapter sich in der unten gezeigten Position befindet, in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll). Verwenden Sie dazu zwei (2) ¼-20 x 2 ½-Zoll-Zylinderschrauben und den mitgelieferten Inbusschlüssel (Abb. 14).

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für den Adapter.

2. Wiederholen Sie die Montage für den gegenüberliegenden Adapter, wobei die glatte Seite des Adapters nach außen zeigen muss (Abb. 15).

3. Befestigen Sie die Vorrichtung an der Tischplatte, indem Sie den Adapter in den Abstandshalter an den Zubehörschienen einhaken.



Abb. 15

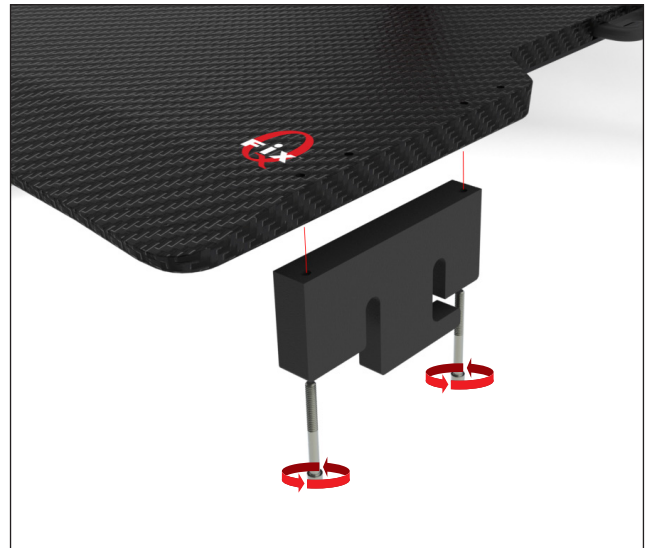


Abb. 16



Abb. 17

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4529M

VARIAN EXACT® COMPATIBLE CT



Benötigte Werkzeuge: Schlitzschraubendreher



DIE VORRICHTUNG DARF BEI VERWENDUNG DIESES CT-ADAPTERS *NICHT* FREITRAGEND ÜBER DAS ENDE DER TISCHPLATTE GEFÜHRT WERDEN. WENN DIE VORRICHTUNG FREITRAGEND ÜBER DAS ENDE DER TISCHPLATTE GEFÜHRT WIRD, KANN SIE VON DER TISCHPLATTE FALLEN UND DEN PATIENTEN VERLETZEN.

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4529M

1. Befestigen Sie 2 Zentrierscheiben an beiden Seiten der Vorrichtung in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit jeweils einer (1) ¼-20 x 1 ¼-Zoll-Schraube (Abb. 17).

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für die Scheiben.

2. Befestigen Sie verbleibenden 2 Zentrierscheiben auf der gegenüberliegenden Seite der ersten beiden Scheiben in den entsprechenden Löchern mit jeweils einer (1) ¼-20 x 1 ¼-Zoll-Schraube (Abb. 18).
3. Befestigen Sie die Vorrichtung auf der Tischplatte, indem Sie die Zentrierscheiben an den Indexkerben ausrichten. Drücken Sie auf die Vorrichtung, bis diese fest sitzt.

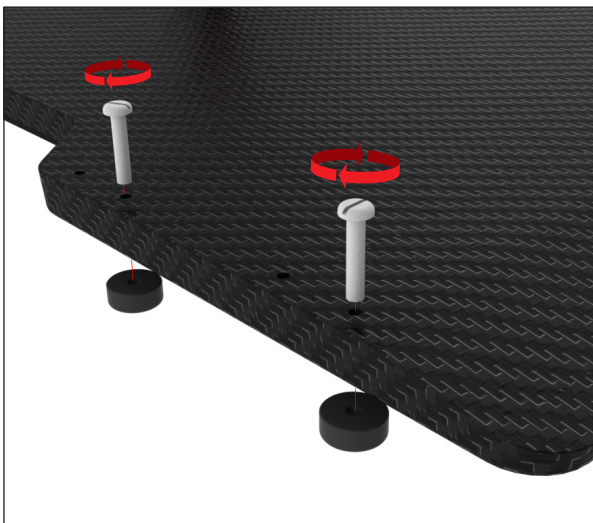


Abb. 18

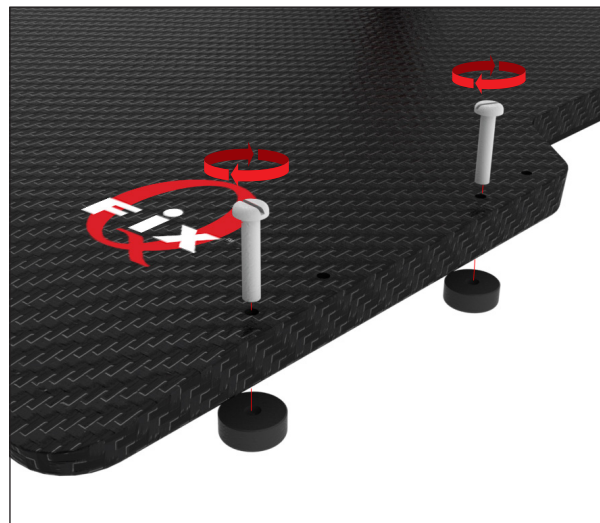


Abb. 19



Abb. 20

EINRICHTUNG DES ADAPTERS


RT-4527MTPCT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ CT



RT-4525L

RT-4527MTPCT

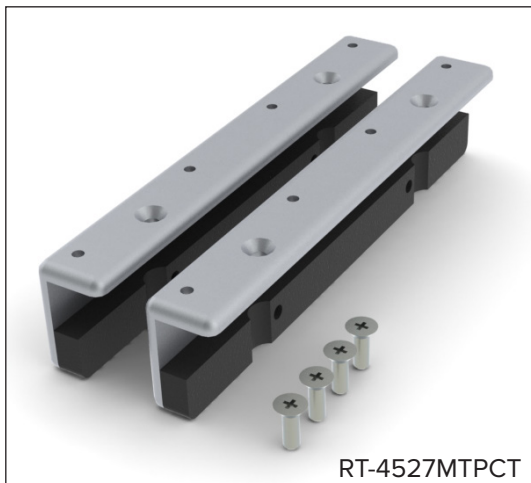

RT-4527MTPCT

Benötigte Werkzeuge:
Kreuzschlitzschraubendreher



DIE VORRICHTUNG DARF BEI VERWENDUNG DIESES CT-ADAPTERS *NICHT* FREITRAGEND ÜBER DAS ENDE DER TISCHPLATTE GEFÜHRT WERDEN. WENN DIE VORRICHTUNG FREITRAGEND ÜBER DAS ENDE DER TISCHPLATTE GEFÜHRT WIRD, KANN SIE VON DER TISCHPLATTE FALLEN UND DEN PATIENTEN VERLETZEN.

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527MTPCT

1. Befestigen Sie den Adapter in der unten gezeigten Position in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit zwei (2) ¼-20 x ¾-Zoll-Schrauben (Abb. 20 und 21).

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für den Adapter.

2. Wiederholen Sie die Montage für den gegenüberliegenden Adapter, wobei die glatte Seite des Adapters nach außen zeigen muss.

3. Befestigen Sie die Vorrichtung, indem Sie die Adapter an der Indexierung entlang der Seite der Tischplatte ausrichten. Drücken Sie auf die Vorrichtung, bis diese fest sitzt.

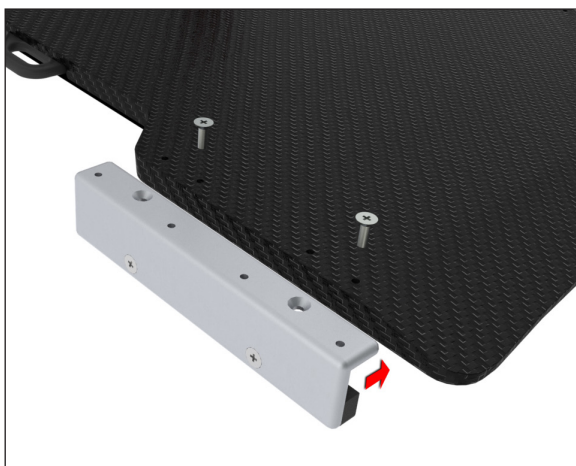


Abb. 21

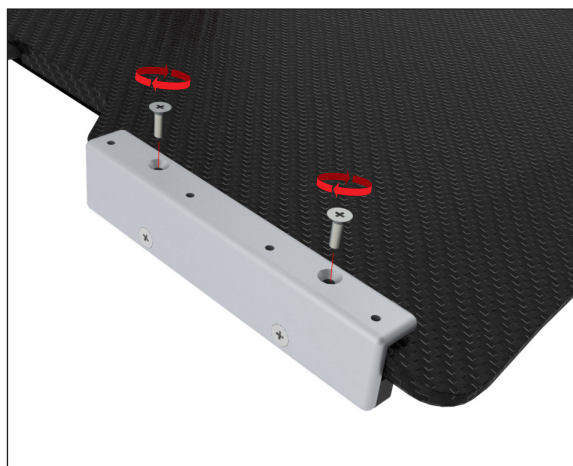


Abb. 22

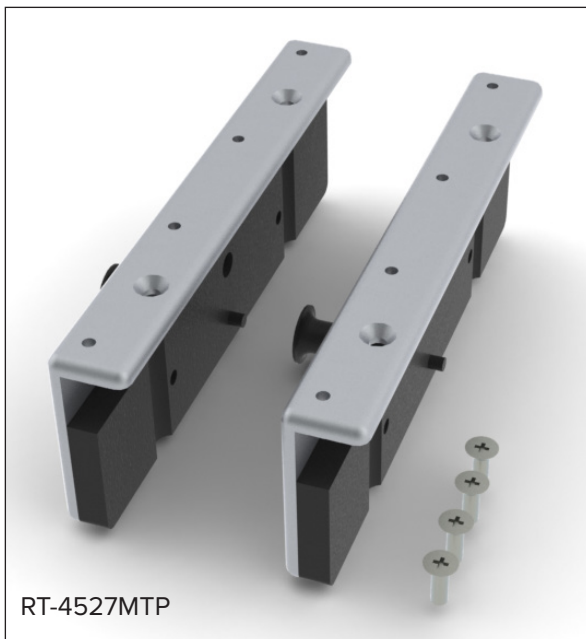


Abb. 23

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™



Benötigte Werkzeuge:
Kreuzschlitzschraubendreher

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527MTP

1. Befestigen Sie den Adapter in der unten gezeigten Position in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit zwei (2) $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{4}$ -Zoll-Schrauben (Abb. 24 und 25).

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für den Adapter.

2. Wiederholen Sie die Montage für den gegenüberliegenden Adapter.
3. Befestigen Sie die Vorrichtung, indem Sie die Adapter an der Indexierung entlang der Seite der Tischplatte ausrichten. Drehen und ziehen Sie den Kolben, um die Vorrichtung auf der Tischplatte zu befestigen/freizugeben.



Abb. 24



Abb. 25

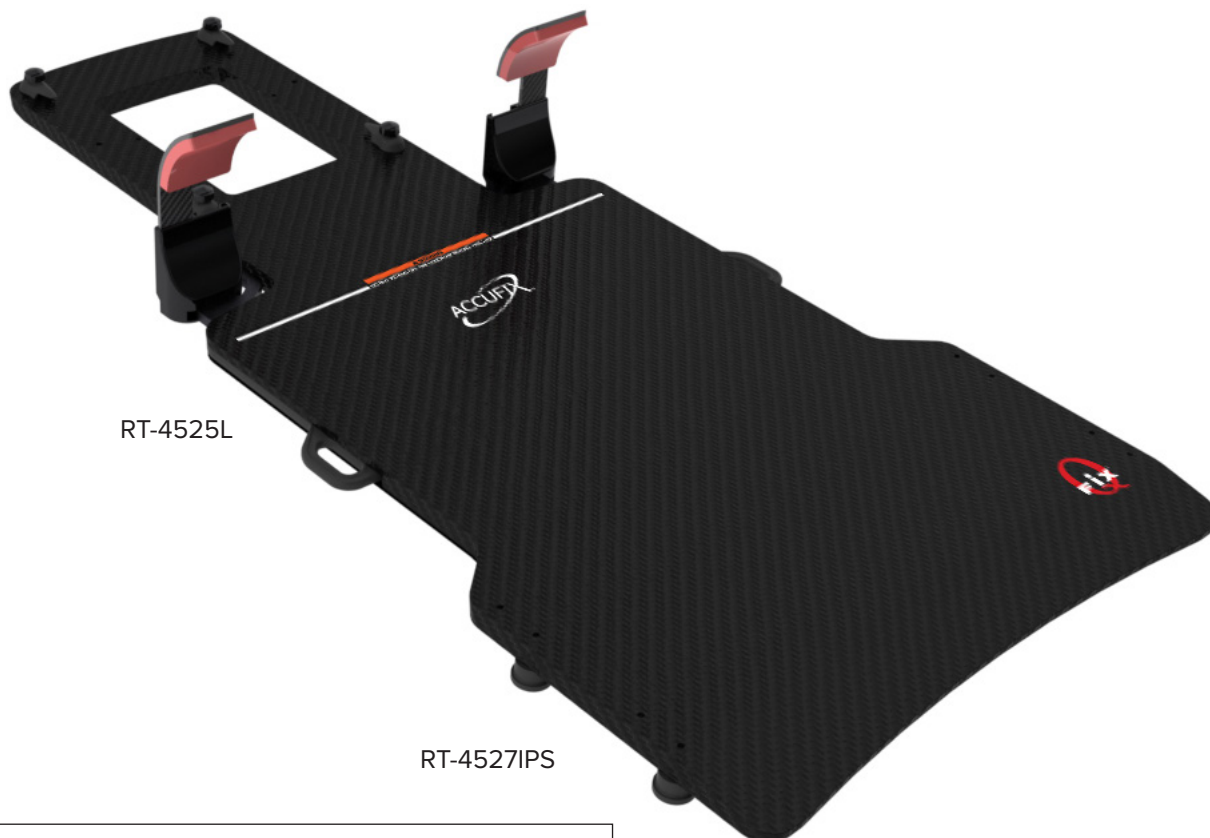


Abb. 26

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™



EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527IPS

1. Befestigen Sie 2 Zentrierscheiben (mit Rand) an beiden Seiten der Vorrichtung in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit jeweils einer (1) ¼-20 x 1 ¼-Zoll-Schraube (Abb. 27).

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für die Scheiben.

2. Befestigen Sie verbleibenden 2 Zentrierscheiben (mit Rand) auf der gegenüberliegenden Seite der ersten beiden Scheiben in den entsprechenden Löchern mit jeweils einer (1) ¼-20 x 1 ¼-Zoll-Schraube (Abb. 28).
3. Befestigen Sie die Vorrichtung auf der Tischplatte, indem Sie die Scheiben mit den Indexkerben ausrichten und dann die Scheiben mit dem Rand zuerst auf der Tischplatte einhaken. Drücken Sie die andere Seite nach unten, bis die Vorrichtung fest sitzt.

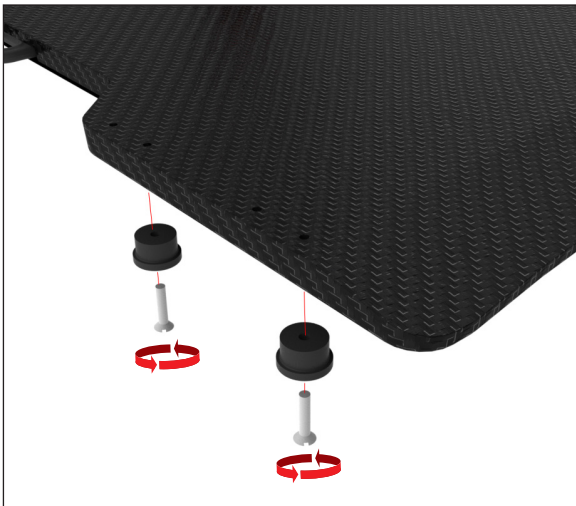


Abb. 27

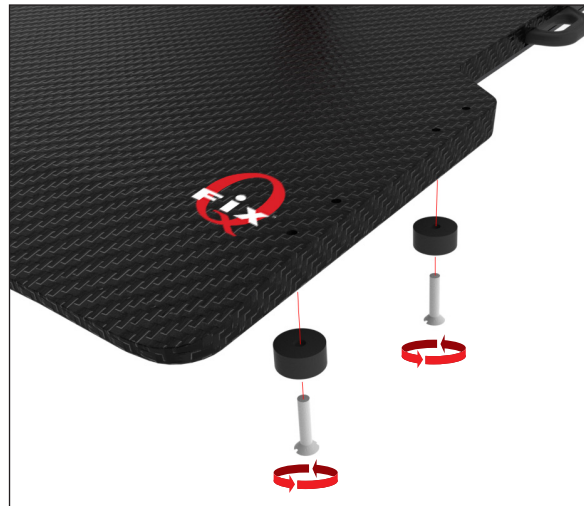


Abb. 28

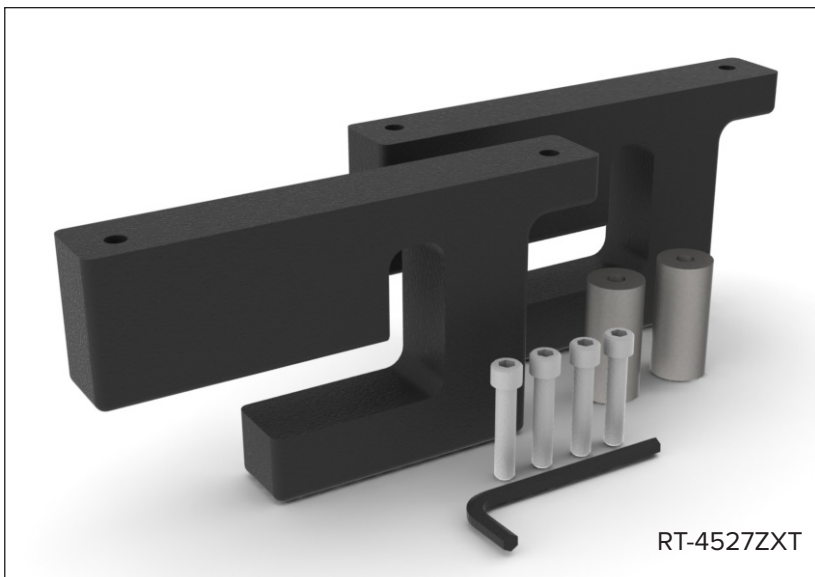


Abb. 29

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT



EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527ZXT

1. Ersetzen Sie den quadratischen Abstandshalter am ZXT Tisch durch den mitgelieferten runden Abstandshalter. (Abb. 30)
2. Befestigen Sie den Adapter in der unten gezeigten Position in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit zwei (2) ¼-20 x 1 ¼-Zoll-Zylinderschrauben und dem mitgelieferten Inbusschlüssel (Abb. 31).

! HINWEIS ! Es gibt einen rechten und einen linken Adapter. Stellen Sie sicher, dass der Adapter nach der Montage bündig mit der Seite der Vorrichtung abschließt. (Abb. 32).

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für die Scheiben.

3. Wiederholen Sie die Montage für den gegenüberliegenden Adapter (Abb. 33).
4. Befestigen Sie die Vorrichtung an der Tischplatte, indem Sie den Adapter in den Abstandshalter an den Zubehörschienen einhaken (Abb. 34).

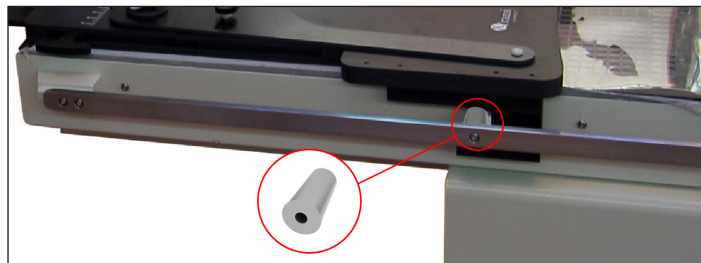


Abb. 30



Abb. 31

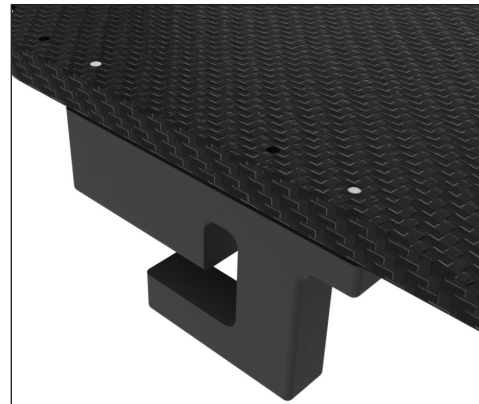


Abb. 32

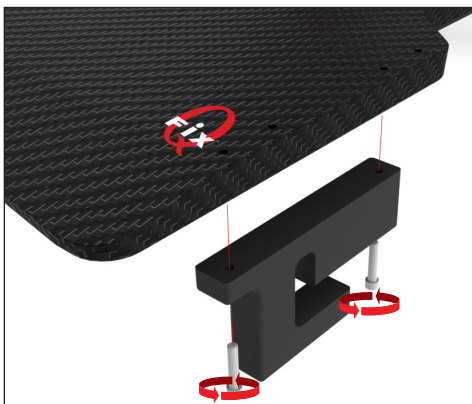


Abb. 33


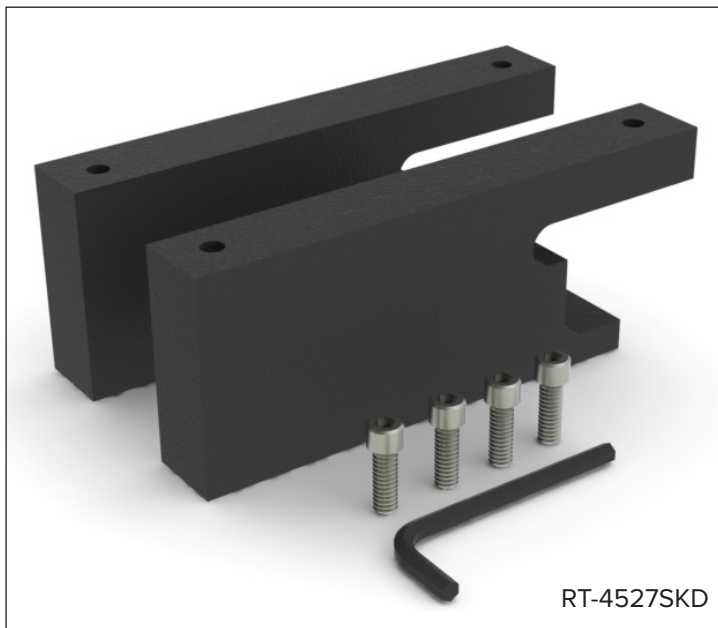


Abb. 34

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527SKD

SIEMENS KD

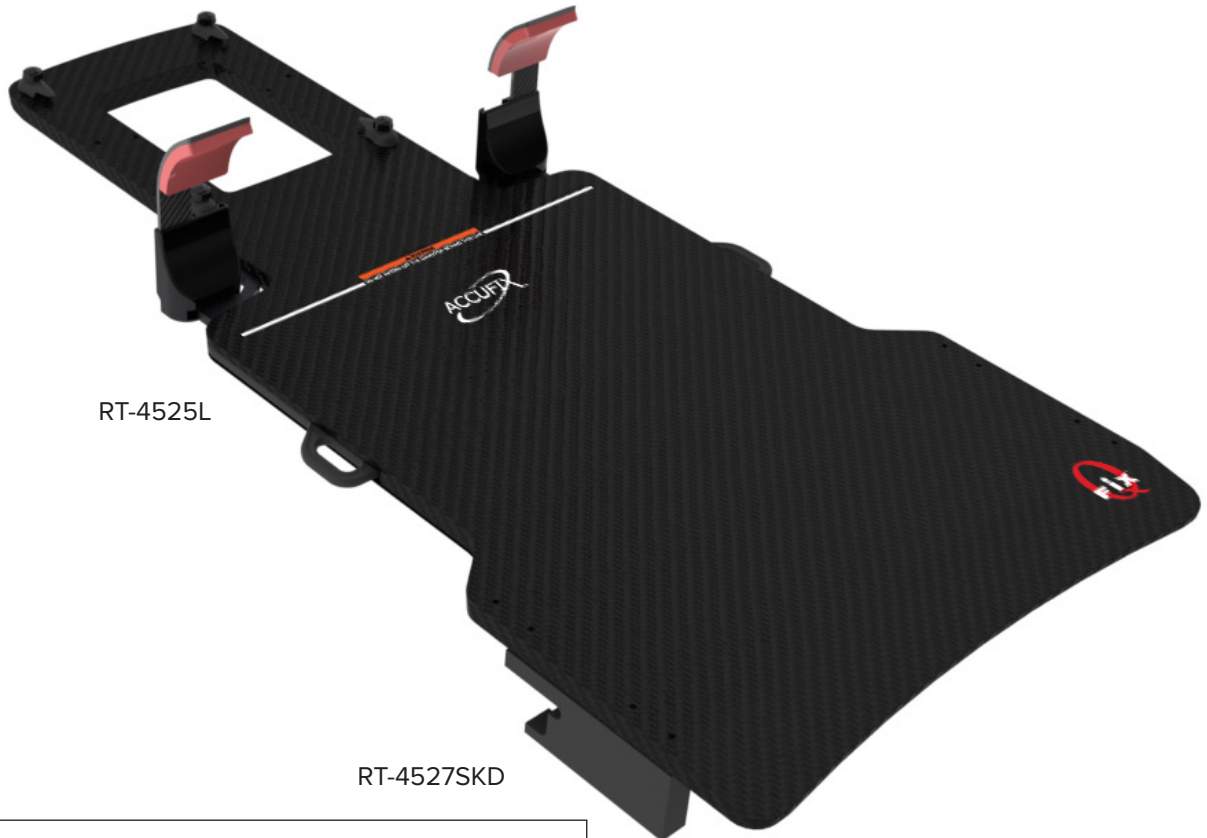

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527SKD

1. Befestigen Sie den Adapter in der unten gezeigten Position in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit zwei (2) $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{4}$ -Zoll-Zylinderschrauben und dem mitgelieferten Inbusschlüssel (Abb. 35).

! HINWEIS ! Es gibt einen rechten und einen linken Adapter. Stellen Sie sicher, dass der Adapter nach der Montage bündig mit der Seite der Vorrichtung abschließt. (Abb. 36)

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für die Scheiben.

2. Wiederholen Sie die Montage für den gegenüberliegenden Adapter (Abb. 37).
3. Befestigen Sie die Vorrichtung an der Tischplatte, indem Sie den Adapter in den Abstandshalter an den Zubehörschienen einhaken. (Abb. 38).



Abb. 35

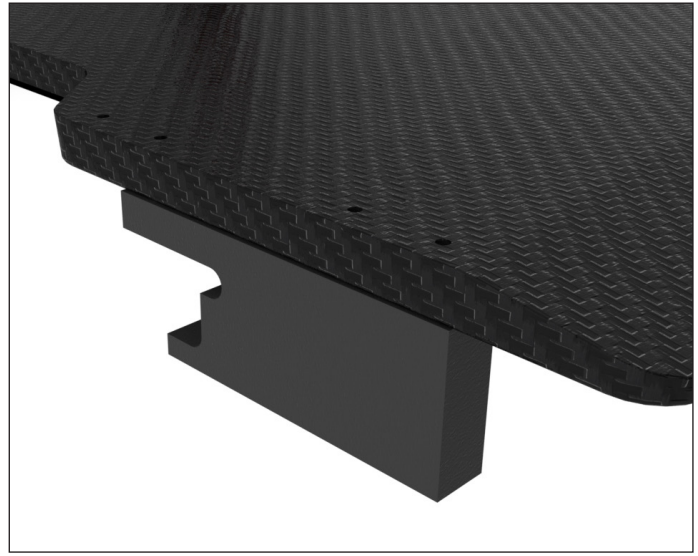


Abb. 36

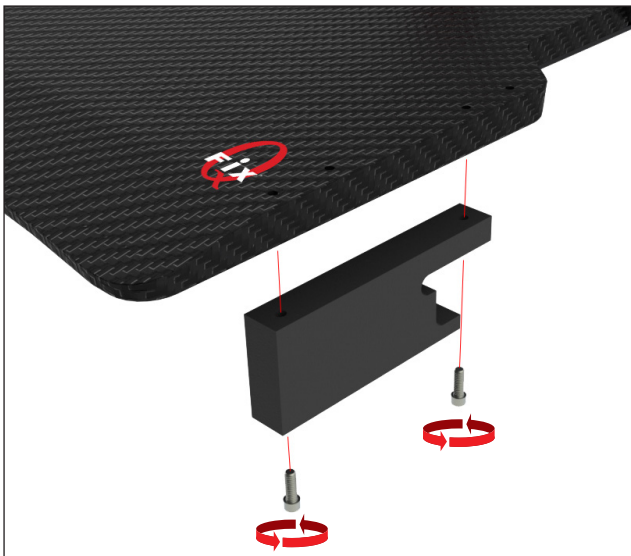


Abb. 37

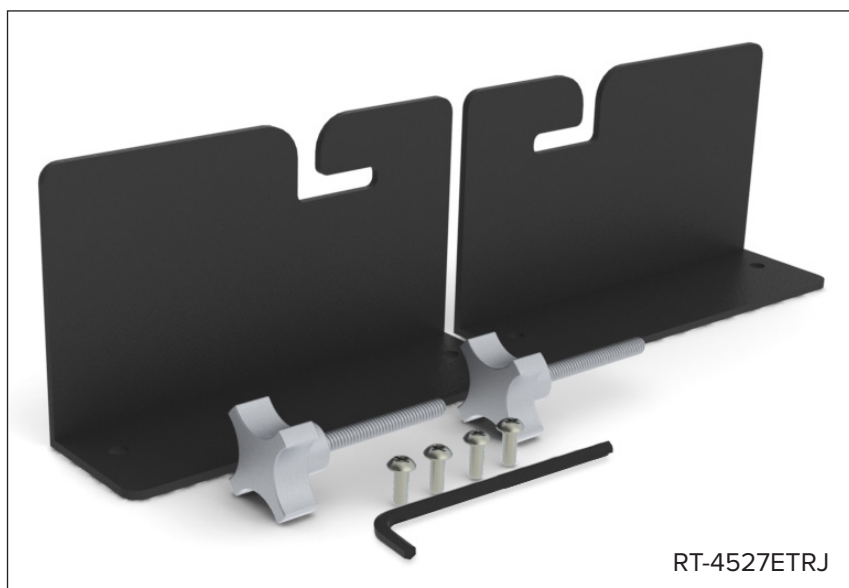


Abb. 38

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527ETRJ

VARIAN ETR



EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527ETRJ

1. Entfernen Sie die dritte Inbusschraube vom oberen Ende des ETR Tisches mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel. (Abb. 39).
 2. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches.
 3. Ersetzen Sie die Inbusschraube durch den mitgelieferten Knauf. Dieser Knauf muss dauerhaft als Teil des Tisches verbleiben. Ziehen Sie den Knauf nicht vollständig fest; lassen Sie etwa 0,5 cm Spielraum (Abb. 40).
 4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches.
 5. Befestigen Sie den Adapter in der unten gezeigten Position in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit zwei (2) ¼-20 x ½-Zoll-Schrauben (Abb. 41).
- ! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für die Scheiben.**
6. Wiederholen Sie die Montage für den gegenüberliegenden Adapter (Abb. 42).
 7. Befestigen Sie die Vorrichtung an der Tischplatte, indem Sie den Adapter am Schaft des Knaufs einhaken. Ziehen Sie den Knauf fest. (Abb. 43)



Abb. 39



Abb. 40

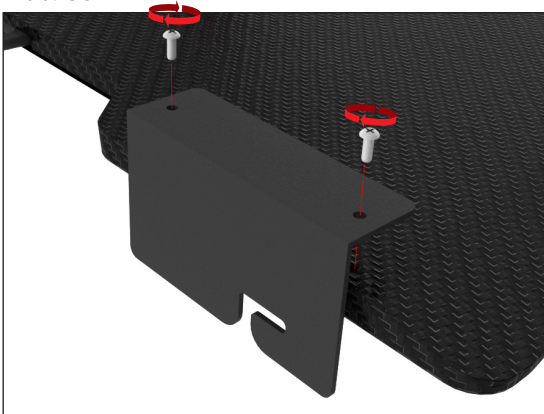


Abb. 41

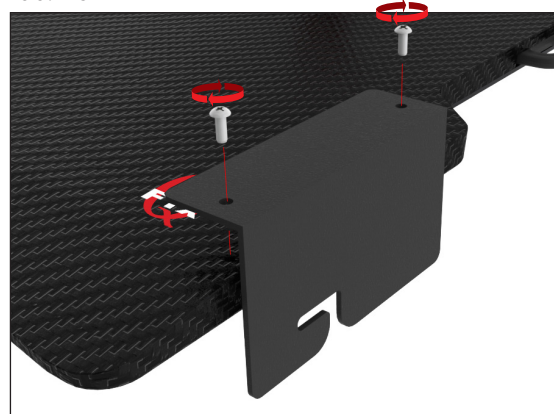


Abb. 42


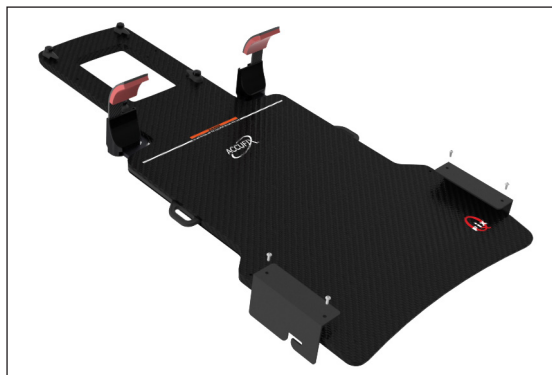


Abb. 43

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527EXA475

SCHMALES INDEXED CT OVERLAY IN EXACT® AUSFÜHRUNG MIT 500 MM BREITE

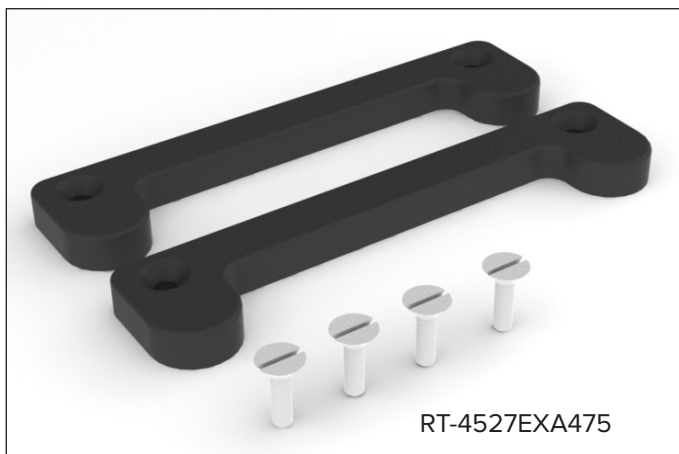

Benötigte Werkzeuge: Schlitzschraubendreher



DIE VORRICHTUNG DARF BEI VERWENDUNG DIESER CT-ADAPTERS NICHT FREITRAGEND ÜBER DAS ENDE DER TISCHPLATTE GEFÜHRT WERDEN. WENN DIE VORRICHTUNG FREITRAGEND ÜBER DAS ENDE DER TISCHPLATTE GEFÜHRT WIRD, KANN SIE VON DER TISCHPLATTE FALLEN UND DEN PATIENTEN VERLETZEN.

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527EXA475

1. Befestigen Sie den Adapter in der unten gezeigten Position in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit zwei (2) ¼-20 x ¾-Zoll-Schrauben (Abb. 44).

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für die Scheiben.

2. Wiederholen Sie die Montage für den gegenüberliegenden Adapter (Abb. 45).
3. Befestigen Sie die Vorrichtung auf der Tischplatte, indem Sie die Adapter an den Indexkerben ausrichten. Drücken Sie auf die Vorrichtung, bis diese fest sitzt.



Abb. 44



Abb. 45

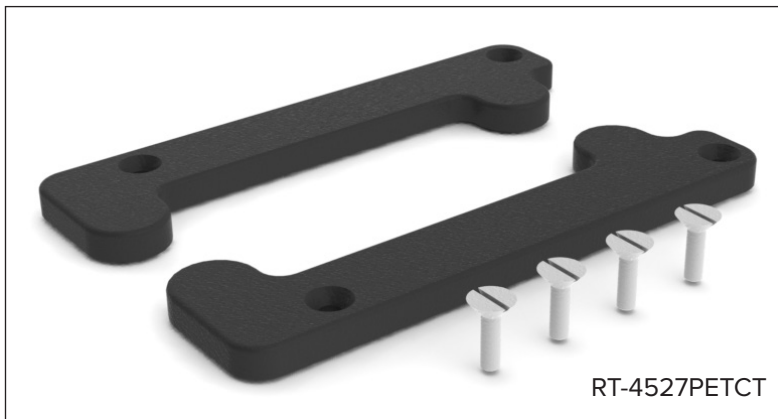


Abb. 46

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527PETCT

PHILIPS GEMINI™ UND GE DISCOVERY™ LS PET/CT OVERLAY MIT
480 MM BREITE



Benötigte Werkzeuge: Schlitzschraubendreher



DIE VORRICHTUNG DARF BEI VERWENDUNG DIESER CT-ADAPTERS NICHT FREITRAGEND ÜBER DAS ENDE DER TISCHPLATTE GEFÜHRT WERDEN. WENN DIE VORRICHTUNG FREITRAGEND ÜBER DAS ENDE DER TISCHPLATTE GEFÜHRT WIRD, KANN SIE VON DER TISCHPLATTE FALLEN UND DEN PATIENTEN VERLETZEN.

EINRICHTUNG DES ADAPTERS

RT-4527PETCT

1. Befestigen Sie den Adapter in der unten gezeigten Position in zwei der Löcher im Abstand von 140 mm (5,5 Zoll) mit zwei (2) ¼-20 x ¾-Zoll-Schrauben (Abb. 47).

! HINWEIS ! Dabei spielt es keine Rolle, welche Löcher verwendet werden. Sofern ein Hand Grip Array montiert ist, verwenden Sie die verfügbaren Löcher für die Scheiben.

2. Wiederholen Sie die Montage für den gegenüberliegenden Adapter (Abb. 48).

3. Befestigen Sie die Vorrichtung auf der Tischplatte, indem Sie die Adapter an den Indexkerben ausrichten. Drücken Sie auf die Vorrichtung, bis diese fest sitzt.



Abb. 47

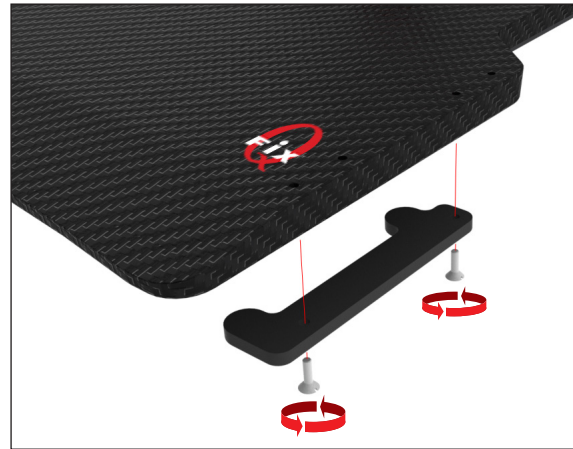


Abb. 48



Abb. 49

MONTAGE DER AUSGLEICHSSCHEIBEN

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (Abb. 50)

1. Entfernen Sie die beiden (2) Schrauben, mit denen der Adapter am Hand Grip Array befestigt ist.
2. Setzen Sie die Ausgleichsscheibe zwischen Adapter und Hand Grip Array ein und richten Sie dabei die Schraubenlöcher an den Löchern in der Ausgleichsscheibe aus.
3. Schrauben Sie die beiden Schrauben wieder fest.
4. Fahren Sie mit den Einrichtungsanweisungen fort.

RT-4527LMI3 (Abb. 51)

1. Entfernen Sie die beiden (2) Schrauben, mit denen der Adapter am Hand Grip Array befestigt ist.
2. Setzen Sie die Ausgleichsscheibe zwischen Adapter und Hand Grip Array ein und richten Sie dabei die Schraubenlöcher an den Löchern in der Ausgleichsscheibe aus.
3. Schrauben Sie die beiden Schrauben wieder fest.
4. Fahren Sie mit den Einrichtungsanweisungen fort.



Abb. 50



Abb. 51



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com