
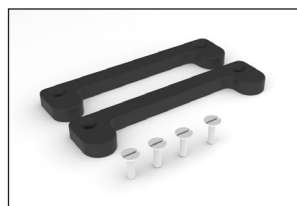
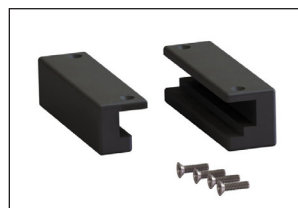
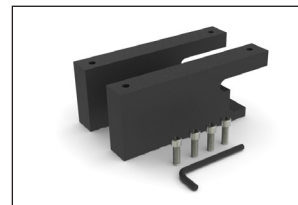
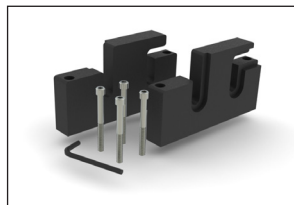
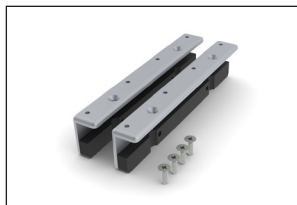
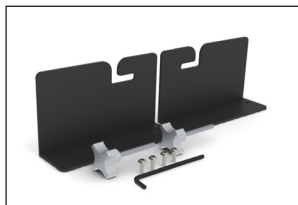
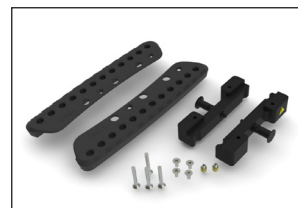
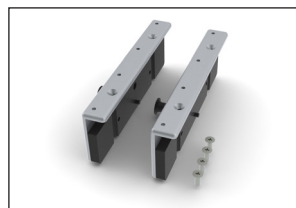
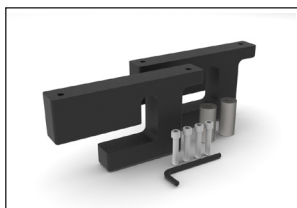


ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Προσαρμογείς δεικτοδότησης

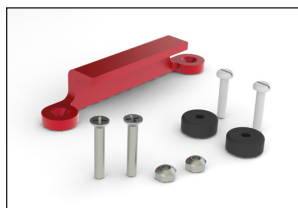

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Οι ονομασίες Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass και Hand Grip Array είναι εμπορικά σήματα της Qfix.

Οι ονομασίες Exact® και ETR® είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Varian Medical Systems.

Η ονομασία Medical Intelligence I-Beam είναι εμπορικό σήμα και η ονομασία Precise® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Elekta AB.

Οι ονομασίες ZXT και TXT είναι εμπορικά σήματα της Siemens AG.

Οι ονομασίες Med-Tec Prodigy και IPPS είναι εμπορικά σήματα της Cinvco Medical Solutions.

Η ονομασία Gemini είναι εμπορικό σήμα της Philips Medical Systems.

Η ονομασία Discovery είναι εμπορικό σήμα της GE Medical.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στον ιστότοπο CQmedical.com για μια παράθεση των συμβόλων και των ορισμών τους.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ Η ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ CQ MEDICAL ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 Η ΣΤΟ SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

Οι προσαρμογείς έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία με τα Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, CURVE™ Board και BoS™ Headframe.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το τεχνολογικό προϊόν ΔΕΝ θα πρέπει να προεξέχει από το άκρο του επιθέματος κλίνης όταν χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους προσαρμογείς CT:


- RT-4527LTOMO (σελ. 7)
- RT-4529M (σελ. 20)
- RT-4527MTPCT (σελ. 22)
- RT-4527EXA475 (σελ. 34)
- RT-4527PETCT (σελ. 36)

Η προεξοχή από το άκρο του επιθέματος κλίνης μπορεί να προκαλέσει πτώση του τεχνολογικού προϊόντος από το επίθεμα κλίνης, τραυματίζοντας τον ασθενή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527LMI3

ΕΛΕΚΤΑ / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
ΤΟΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

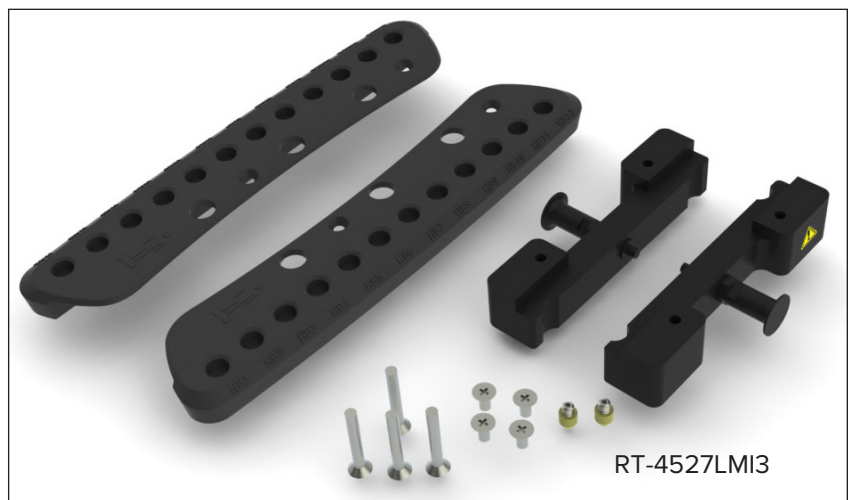

Απαραίτητα εργαλεία: Κατσαβίδι Phillips



!ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ, ΚΑΘΩΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ, ΟΤΑΝ Η ΠΙΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ.

4

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – 2002950_IFU, Indexing Adapters_EL
CQ Medical | +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 | www.CQmedical.com

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527LMI3


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Κατά την τοποθέτηση σε τεχνολογικό προϊόν πάχους 28 mm, όπως το Encompass™, ανατρέξτε στη σελίδα 38 για την εγκατάσταση διορθωτών πριν συνεχίσετε με τη ρύθμιση.

1. Τοποθετήστε τους προσαρμογείς σε κάθε Hand Grip Array χρησιμοποιώντας 2 βίδες (έκαστο), 1/4-20 x 1 1/2" (Εικ. 1).
2. Τοποθετήστε τον κίτρινο προσαρμογέα τοποθέτησης κώνου απευθείας στο κάτω μέρος του τεχνολογικού προϊόντος (τοποθετήστε έναν σε κάθε πλευρά). (Εικ. 2 και 2a)
3. Τοποθετήστε τα Hand Grip Array στο τεχνολογικό προϊόν, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες (έκαστο), 1/4-20 x 1/2". (Εικ. 3)


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Ενδέχεται να υπάρχει σημείο εγκλωβισμού μεταξύ του προσαρμογέα του τεχνολογικού προϊόντος και του επιθέματος κλίνης, όταν η πίεση εφαρμόζεται επάνω από τη γραμμή προειδοποίησης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των Hand Grip Array, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης και στον Οδηγό προϊόντος του Hand Grip Array.


4. Εντοπίστε το τεχνολογικό προϊόν επάνω στο επίθεμα κλίνης, ευθυγραμμίζοντας τον κίτρινο κώνο με τις οπές δεικτοδότησης στην επάνω επιφάνεια του επιθέματος κλίνης. Περιστρέψτε και τραβήξτε το έμβολο, για να προσαρτήσετε/απελευθερώσετε το τεχνολογικό προϊόν στο επίθεμα κλίνης.

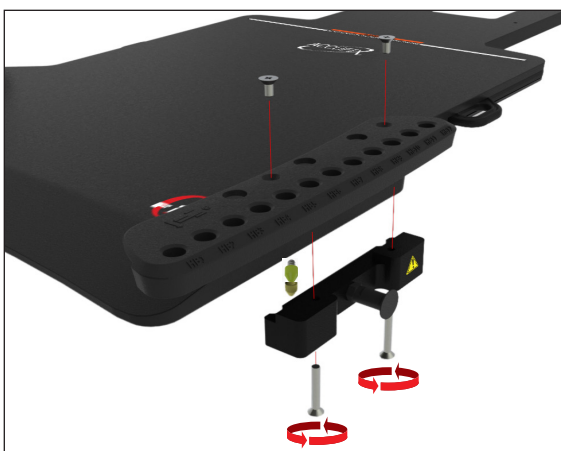


Εικ. 1

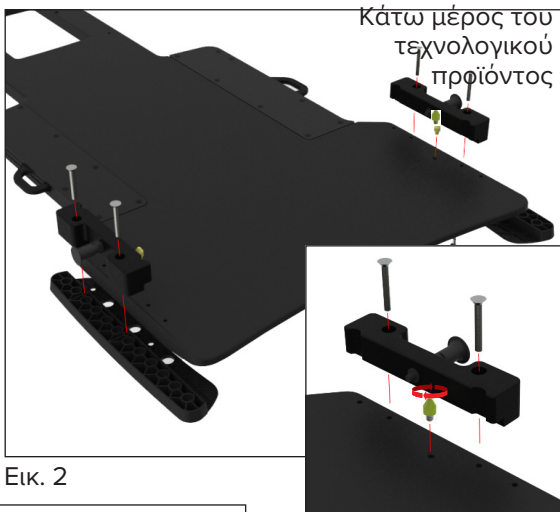

Εικ. 2

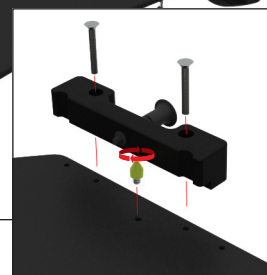

Εικ. 2a

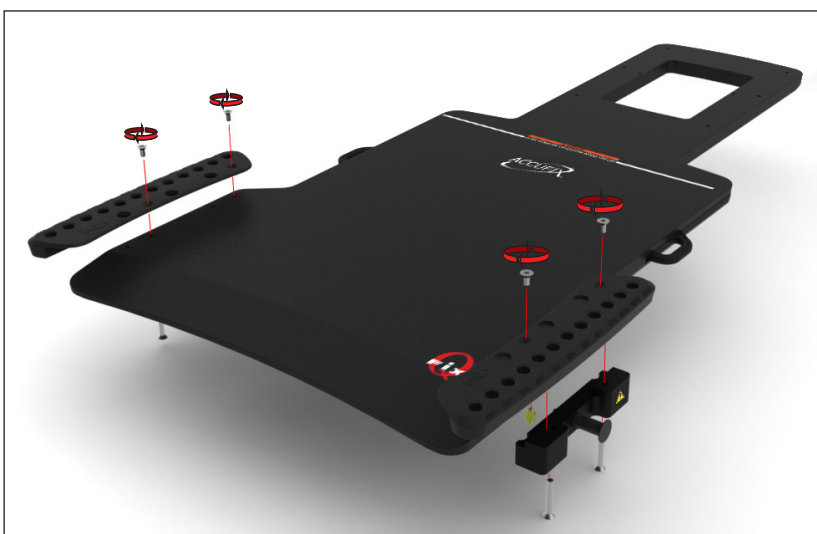

Εικ. 3

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527LTOMO




! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ, ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΛΙΝΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527LTOMO

1. Τοποθετήστε τον κίτρινο προσαρμογέα τοποθέτησης κώνου απευθείας στο κάτω μέρος του τεχνολογικού προϊόντος (τοποθετήστε έναν σε κάθε πλευρά) (Εικ. 4 και 5).
2. Εντοπίστε το τεχνολογικό προϊόν επάνω στο επίθεμα κλίνης, ευθυγραμμίζοντας τον κίτρινο κώνο με τις οπές δεικτοδότησης στην επάνω επιφάνεια του επιθέματος κλίνης.

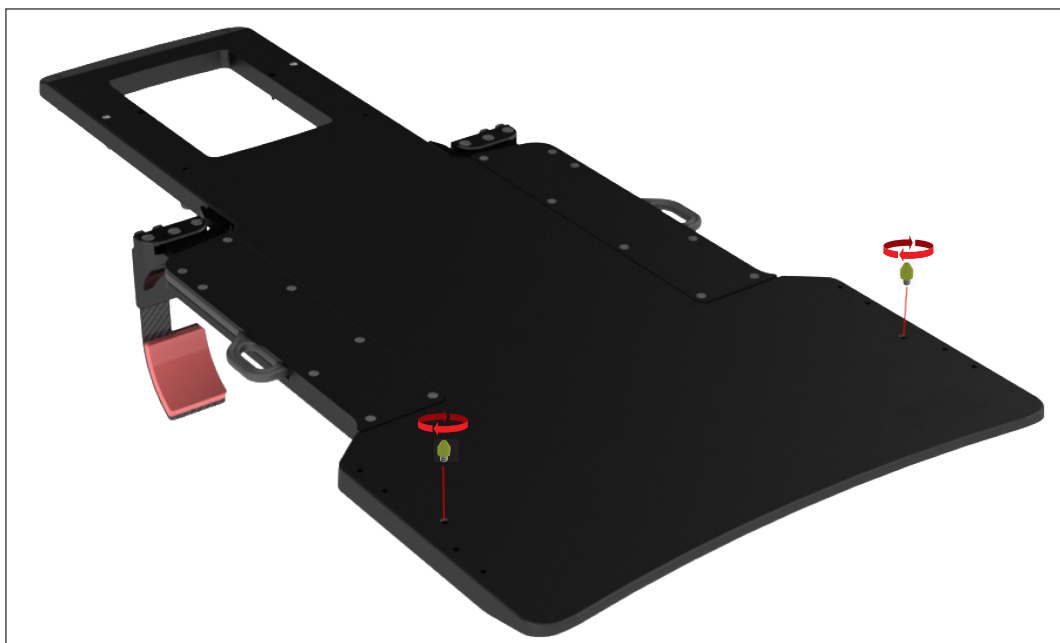

Εικ. 4




Εικ. 5

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527MI

ΕΛΕΚΤΑ / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
ΤΟΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

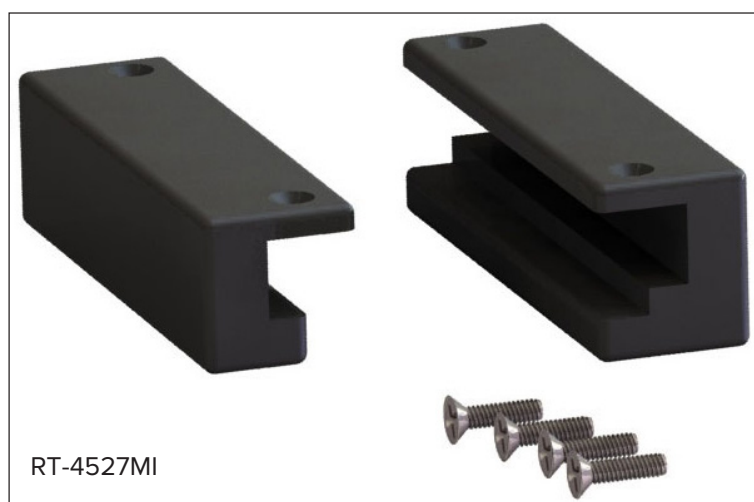

Απαραίτητα εργαλεία: Κατσαβίδι Phillips

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527MI


1. Τοποθετήστε οποιονδήποτε προσαρμογέα στη μία πλευρά του τεχνολογικού προϊόντος στη θέση που φαίνεται παρακάτω, χρησιμοποιώντας βίδες 2 (έκαστο), 1/4-20 x 1/2". (Εικ. 6)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τον προσαρμογέα.


2. Επαναλάβετε την εγκατάσταση για τον απέναντι προσαρμογέα (Εικ. 7).

3. Τοποθετήστε τη ράβδο τοποθέτησης 2 καρφίδων στην επιθυμητή θέση (μόλις συνδεθούν οι καρφίδες της ράβδου τοποθέτησης, θα ευθυγραμμιστούν με τις οπές στο κάτω μέρος του τεχνολογικού προϊόντος) (Εικ. 6, 7 και 8).

4. Εγκαταστήστε το τεχνολογικό προϊόν στο επίθεμα κλίνης, αγκιστρώνοντας πρώτα τον μεγαλύτερο από τους δύο προσαρμογείς στο επίθεμα κλίνης, στη συνέχεια τον μικρότερο προσαρμογέα και τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιώντας τη ράβδο τοποθέτησης 2 καρφίδων.

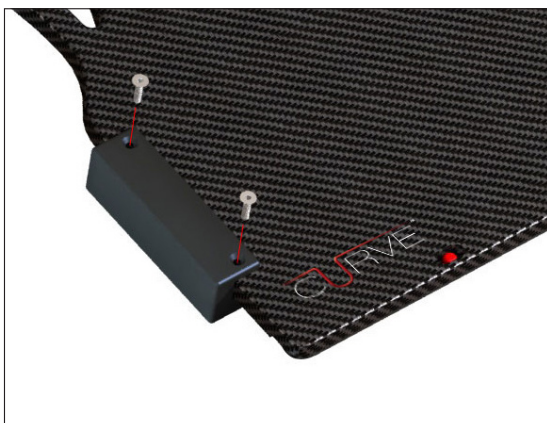

Εικ. 6

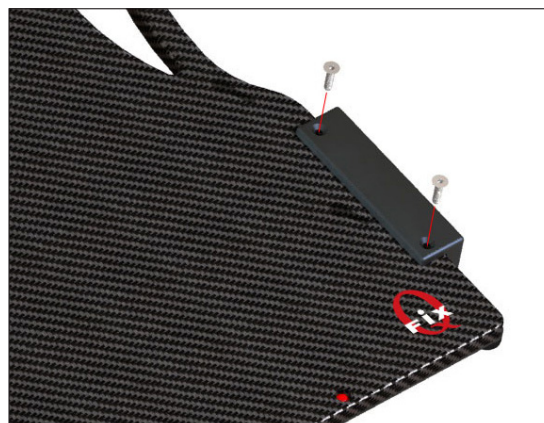

Εικ. 7




Εικ. 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527EXAG

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ VARIAN EXACT®

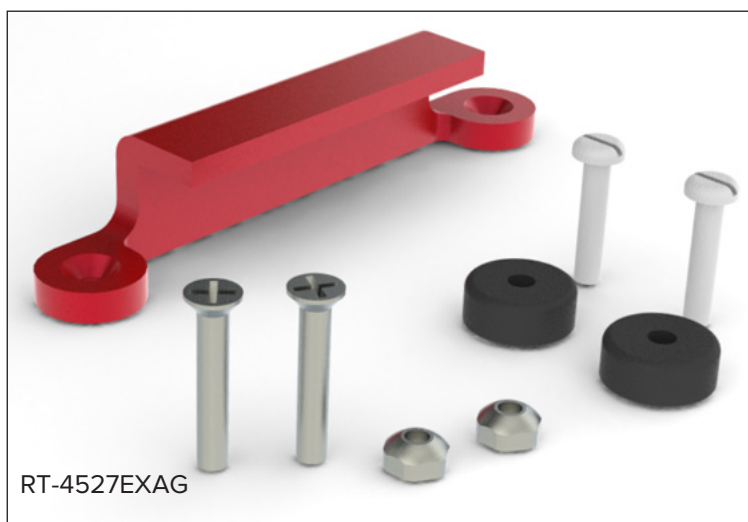

Απαραίτητα εργαλεία: Κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής και κατσαβίδι Philips

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527EXAG


1. Τοποθετήστε τον κόκκινο προσαρμογέα στο τεχνολογικό προϊόν, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες, 1/4-20 x 1 3/8". Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα 2 παξιμάδια ασφαλείας, 1/4-20 στις βίδες από την επάνω πλευρά του τεχνολογικού προϊόντος (Εικ. 9).

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Ο προσαρμογέας μπορεί να εγκατασταθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά του τεχνολογικού προϊόντος. Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τον προσαρμογέα.

2. Τοποθετήστε 2 δίσκους τοποθέτησης στην απέναντι πλευρά του προσαρμογέα τοποθέτησης, στις αντίστοιχες οπές, χρησιμοποιώντας 1/4-20 x 1 1/4" βίδες (1 για έκαστο) (Εικ. 10).
3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν στο επίθεμα κλίνης, αγκιστρώνοντας τον κόκκινο προσαρμογέα στη μία πλευρά και, στη συνέχεια, πιέστε την πλευρά με τους δίσκους τοποθέτησης προς τα κάτω στις εγχοπές δεικτοδότησης μέχρι να ασφαλίσει.



Εικ. 9

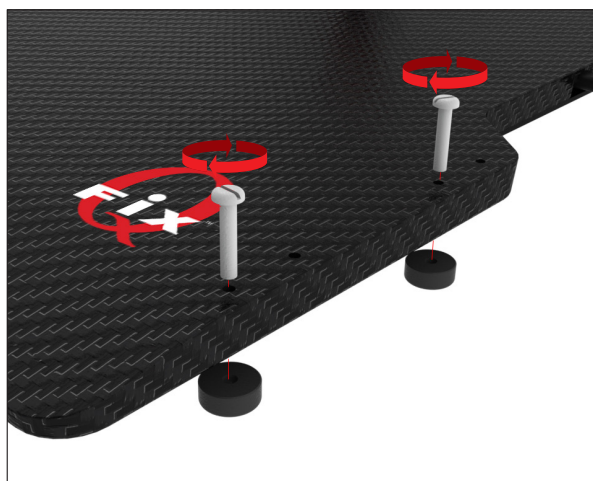

Εικ. 10



Εικ. 11

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527QFIX

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ QFIX™ ΚΝΥΕ™ ΚΑΙ QUANTUM™



Απαραίτητα εργαλεία: Κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής και κατσαβίδι Philips

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527QFIX

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στο τεχνολογικό προϊόν, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες, 1/4-20 x 3/4". Βεβαιωθείτε ότι το τμήμα του προσαρμογέα με την προεξοχή είναι στραμμένο προς τα μέσα, ώστε να μπορεί να ασφαλίσει στο χέιλος του τεχνολογικού προϊόντος Qfix (Εικ. 12).


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Ο προσαρμογέας μπορεί να εγκατασταθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά του τεχνολογικού προϊόντος. Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τον προσαρμογέα.

2. Τοποθετήστε 2 δίσκους τοποθέτησης στην απέναντι πλευρά του προσαρμογέα τοποθέτησης, στις αντίστοιχες οπές, χρησιμοποιώντας 1/4-20 x 1 1/4" βίδες (1 για έκαστο) (Εικ. 13).

3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν στο επίθεμα κλίνης, αγκιστρώνοντας τον προσαρμογέα στη μία πλευρά του επιθέματος κλίνης και, στη συνέχεια, πιέστε την πλευρά με τους δίσκους τοποθέτησης προς τα κάτω στις εγκοπές δεικτοδότησης μέχρι να ασφαλίσει.



Εικ. 12

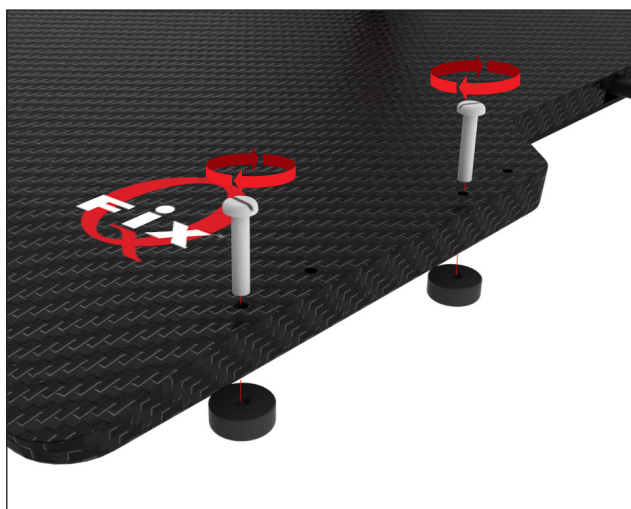

Εικ. 13




Εικ. 14

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

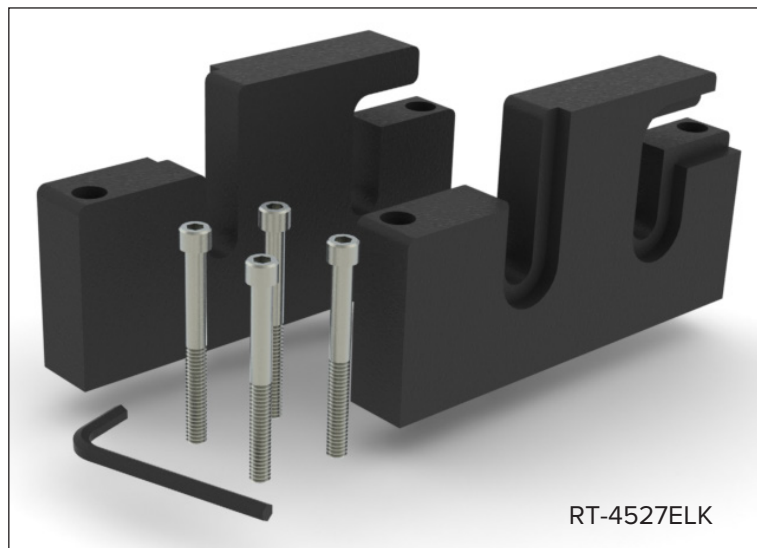

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527ELK


1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα έτσι ώστε η λεία επιφάνεια να βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του τεχνολογικού προϊόντος και ο προσαρμογέας να βρίσκεται στη θέση που φαίνεται παρακάτω, σε δύο από τις οπές με απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2, 1/4-20 x 2 1/2" βίδες πώματος με το παρεχόμενο κλειδί Allen (Εικ. 14).

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τον προσαρμογέα.

2. Επαναλάβετε την τοποθέτηση για τον απέναντι προσαρμογέα, διατηρώντας τη λεία πλευρά του προσαρμογέα στραμμένη προς τα έξω (Εικ. 15).
3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν επάνω στο επίθεμα κλίνης, αγκιστρώνοντας τον προσαρμογέα στον αποστάτη στις βοηθητικές ράγες.



Εικ. 15

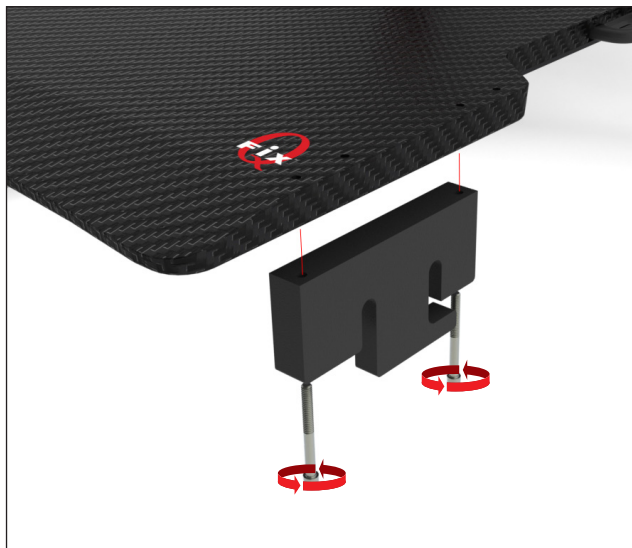

Εικ. 16



Εικ. 17

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4529M

CT ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VARIAN EXACT®



Απαραίτητα εργαλεία: Κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής



ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ CT. Η ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΛΙΝΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ


RT-4529M

1. Τοποθετήστε 2 δίσκους τοποθέτησης σε κάθε πλευρά του τεχνολογικού προϊόντος, σε δύο από τις οπές με απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 1/4-20 x 1 1/4" βίδες (1 για έκαστο) (Εικ. 17).


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τους δίσκους.

2. Τοποθετήστε τους 2 εναπομείναντες δίσκους τοποθέτησης στην απέναντι πλευρά του 1ου από τους δύο δίσκους, στις αντίστοιχες οπές, χρησιμοποιώντας 1/4-20 x 1 1/4" βίδες (1 για έκαστο) (Εικ. 18).

3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν στο επίπεδο κλίνη, ευθυγραμμίζοντας τους δίσκους τοποθέτησης με τις εγκοπές δεικτοδότησης. Πιέστε προς τα κάτω το τεχνολογικό προϊόν μέχρι να ασφαλίσει.

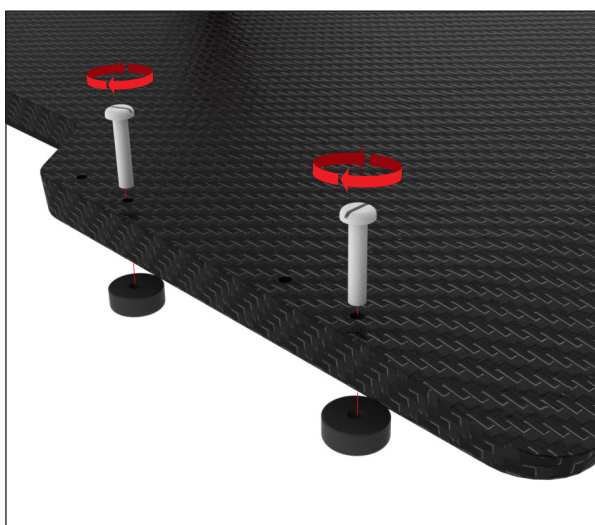

Εικ. 18

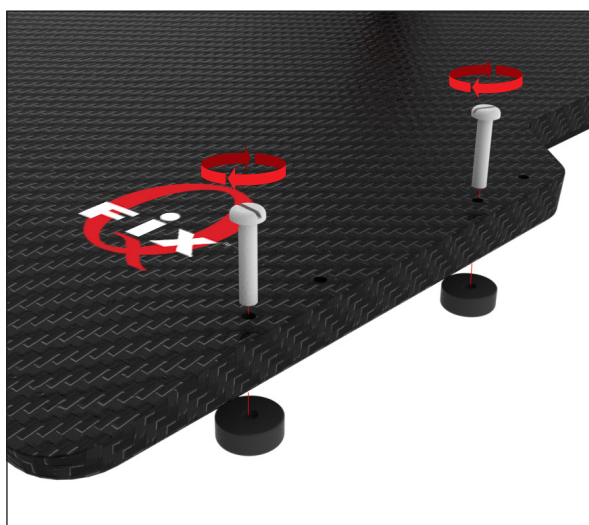

Εικ. 19




Εικ. 20

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527MTPCT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ CT

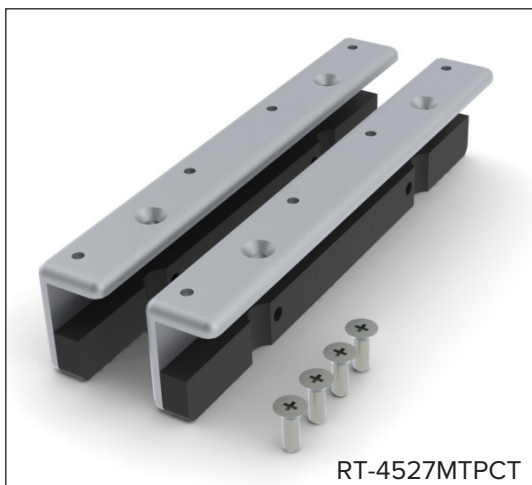

Απαραίτητα εργαλεία: Κατσαβίδι Philips



ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ CT. Η ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΛΙΝΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ


RT-4527MTPCT

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη θέση που φαίνεται παρακάτω, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες, 1/4-20 x 3/4" (Εικ. 20 και 21).


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τον προσαρμογέα.

2. Επαναλάβετε την τοποθέτηση για τον απέναντι προσαρμογέα, διατηρώντας τη λεία πλευρά του προσαρμογέα στραμμένη προς τα έξω.

3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν, ευθυγραμμίζοντας τους προσαρμογείς με τη δεικτοδότηση κατά μήκος της πλευράς του επιθέματος κλίνης. Πιέστε προς τα κάτω το τεχνολογικό προϊόν μέχρι να ασφαλίσει.

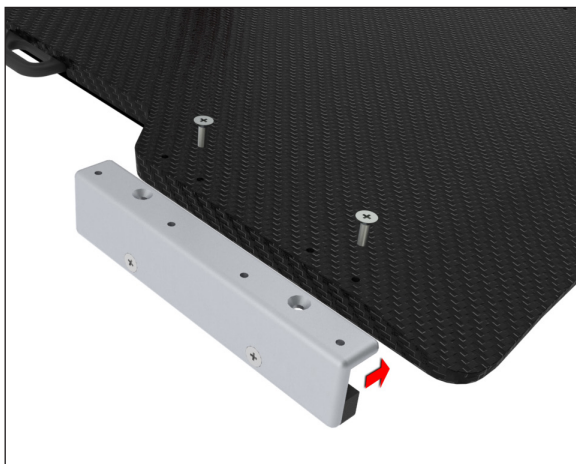

Εικ. 21

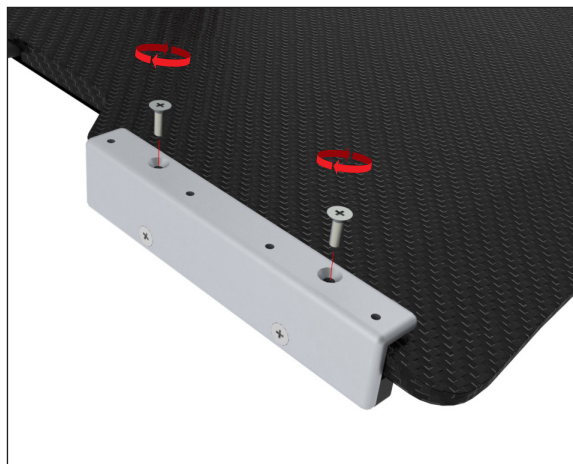

Εικ. 22




Εικ. 23

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

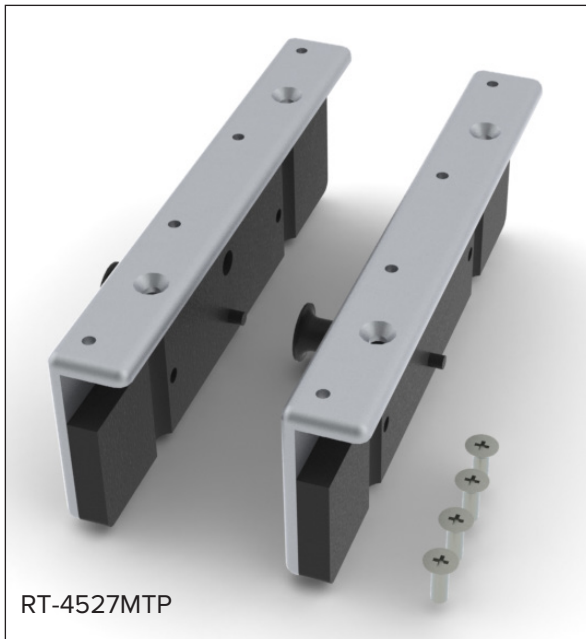

Απαραίτητα εργαλεία: Κατσαβίδι Philips

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527MTP

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη θέση που φαίνεται παρακάτω, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες, 1/4-20 x 3/4" (Εικ. 24 και 25).

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σκεύος χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σκεύος για τον προσαρμογέα.

2. Επαναλάβετε την εγκατάσταση για τον απέναντι προσαρμογέα.

3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν, ευθυγραμμίζοντας τους προσαρμογείς με τη δεικτοδότηση κατά μήκος της πλευράς του επιθέματος κλίνης. Περιστρέψτε και τραβήξτε το έμβολο, για να προσαρτήσετε/απελευθερώσετε το τεχνολογικό προϊόν στο επίθεμα κλίνης.



Εικ. 24



Εικ. 25




Εικ. 26

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

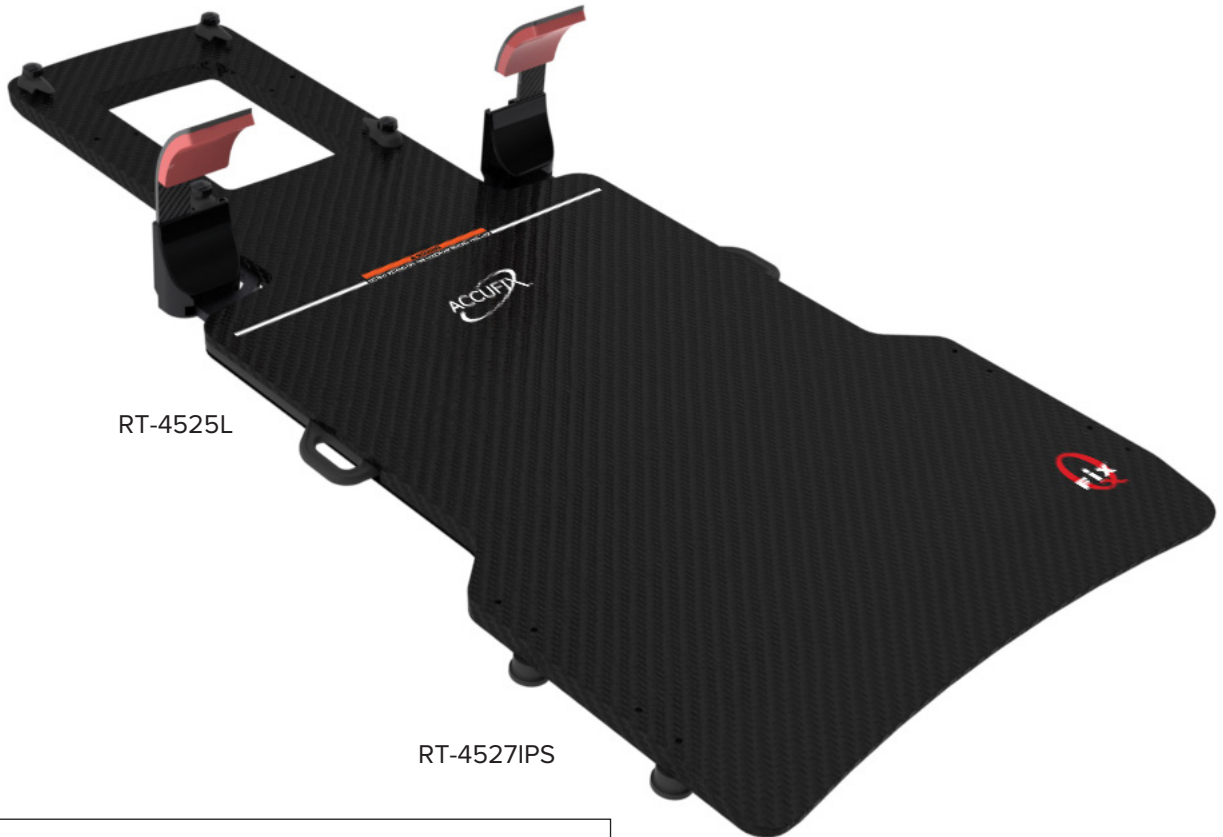

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ


RT-4527IPS

1. Τοποθετήστε 2 δίσκους τοποθέτησης (με χείλος) σε κάθε πλευρά του τεχνολογικού προϊόντος, σε δύο από τις οπές με απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 1/420 x 1 1/4" βίδες (1 έκαστο) (Εικ. 27).


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τους δίσκους.

2. Τοποθετήστε τους 2 εναπομείναντες δίσκους τοποθέτησης (χωρίς χείλος) στην απέναντι πλευρά του 1ου από τους δύο δίσκους, στις αντίστοιχες οπές, χρησιμοποιώντας 1/4-20 x 1 1/4" βίδες (1 για έκαστο) (Εικ. 28).

3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν στο επίθεμα κλίνης, ευθυγραμμίζοντας τους δίσκους με τις εγχοπές δεικτοδότησης και, στη συνέχεια, αγκιστρώστε πρώτα τους δίσκους που έχουν χείλος επάνω τους στο επίθεμα κλίνης. Πιέστε προς τα κάτω στην άλλη πλευρά, μέχρι το τεχνολογικό προϊόν να ασφαλίσει.

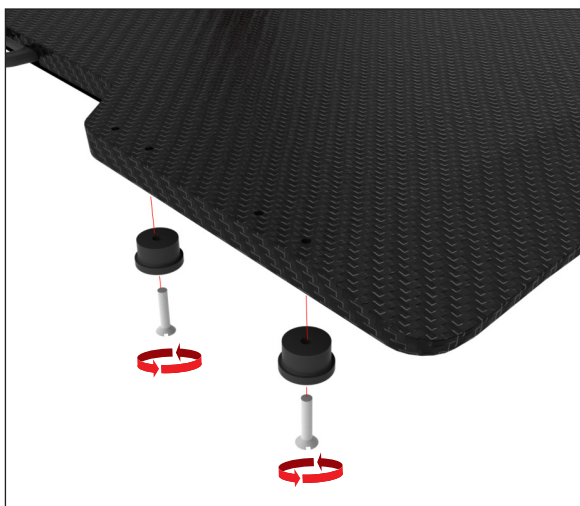

Εικ. 27

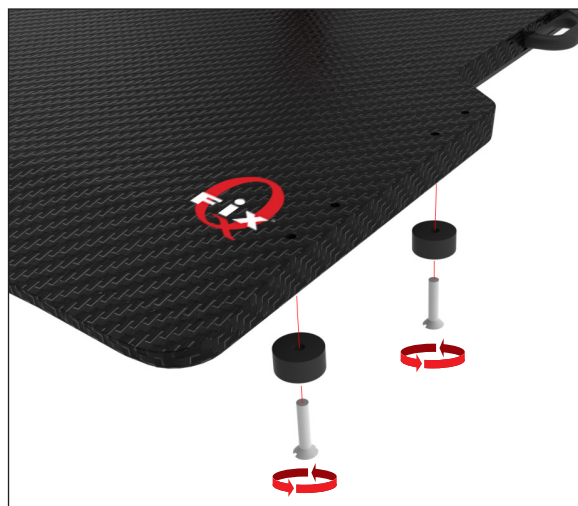

Εικ. 28




Εικ. 29

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT

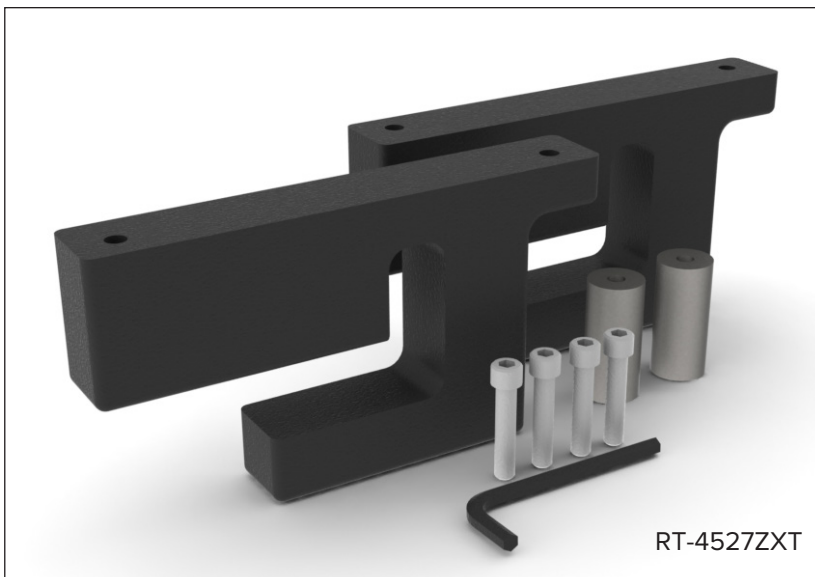

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527ZXT

1. Αντικαταστήστε τον τετράγωνο αποστάτη στην κλίνη ZXT με τον παρεχόμενο στρογγυλό αποστάτη. (Εικ. 30)
2. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη θέση που φαίνεται παρακάτω, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες πώματος 1/4-20 x 1 1/4" με το παρεχόμενο κλειδί Allen (Εικ. 31).

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Υπάρχει ένας δεξιός και ένας αριστερός προσαρμογέας. Βεβαιωθείτε ότι μόλις τοποθετηθεί, ο προσαρμογέας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την πλευρά του τεχνολογικού προϊόντος. (Εικ. 32).

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τους δίσκους.


3. Επαναλάβετε την εγκατάσταση για τον απέναντι προσαρμογέα (Εικ. 33).
4. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν στο επίθεμα κλίνης, αγκιστρώνοντας τον προσαρμογέα επάνω στον αποστάτη στις βοηθητικές ράγες (Εικ. 34).




Εικ. 30



Εικ. 31

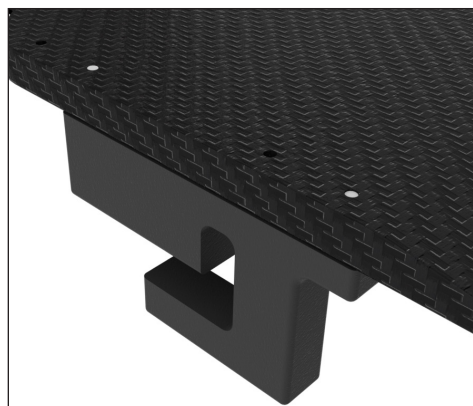

Εικ. 32

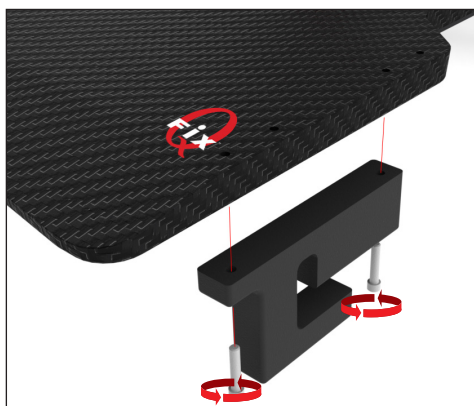

Εικ. 33





Εικ. 34

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527SKD

SIEMENS KD

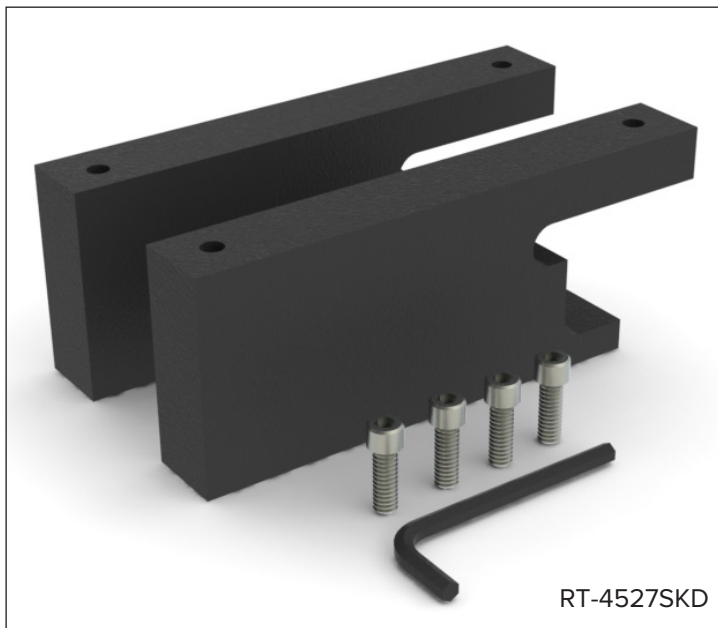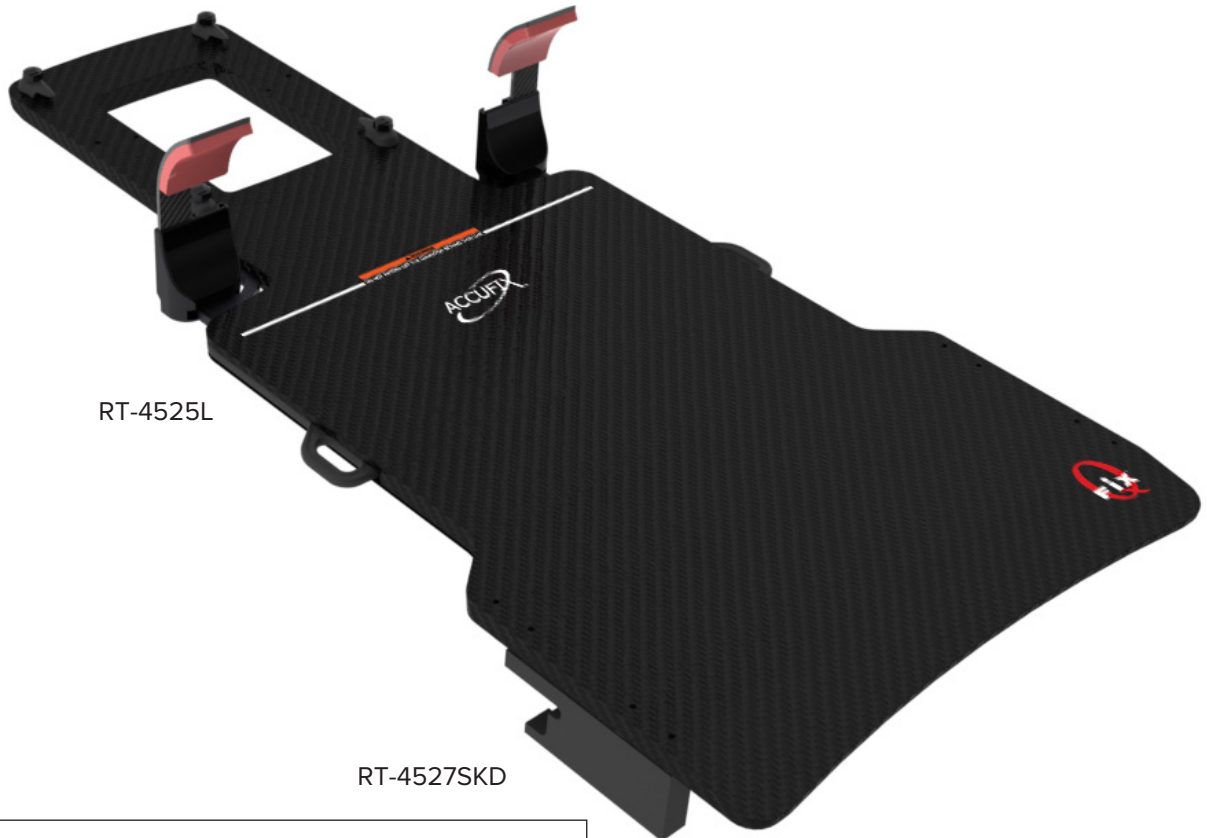

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527SKD


1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη θέση που φαίνεται παρακάτω, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες πώματος 1/4-20 x 3/4" με το παρεχόμενο κλειδί Allen (Εικ. 35).

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Υπάρχει ένας δεξιός και ένας αριστερός προσαρμογέας. Βεβαιωθείτε ότι μόλις τοποθετηθεί, ο προσαρμογέας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την πλευρά του τεχνολογικού προϊόντος. (Εικ. 36)


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σεντ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σεντ οπών για τους δίσκους.

2. Επαναλάβετε την εγκατάσταση για τον απέναντι προσαρμογέα (Εικ. 37).

3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν επάνω στο επίθεμα κλίνης, αγκιστρώνοντας τον προσαρμογέα στον αποστάτη στις βοηθητικές ράγες.

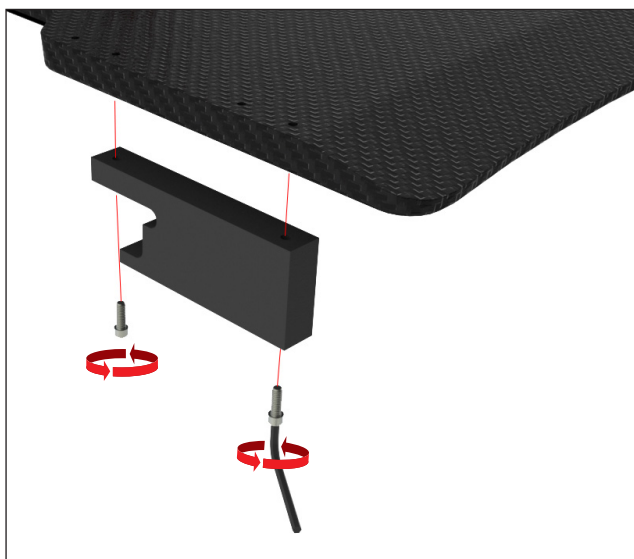

Εικ. 35

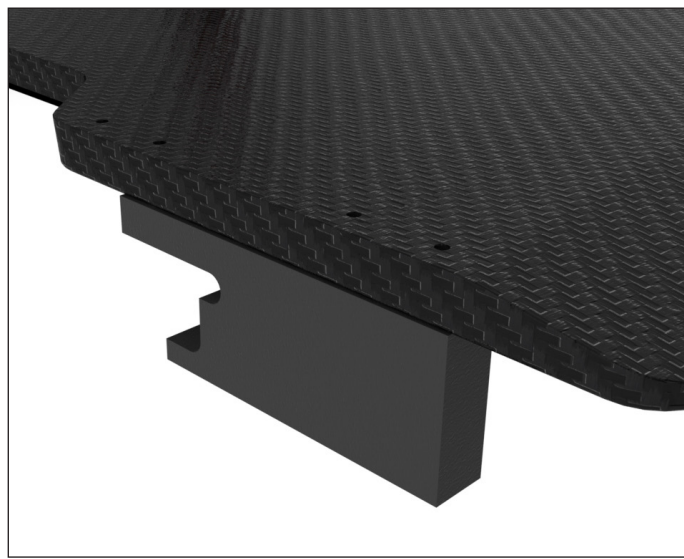

Εικ. 36



Εικ. 37




Εικ. 38

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527ETRJ

VARIAN ETR

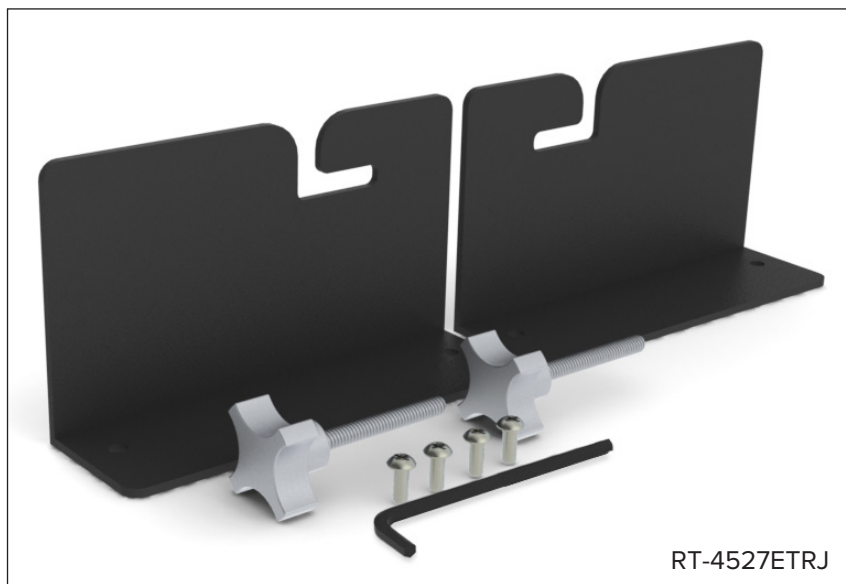

RT-4527ETRJ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527ETRJ


1. Αφαιρέστε την τρίτη βίδα Allen από το άνω άκρο της κλίνης ETR, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί Allen. (Εικ. 39).
 2. Επαναλάβετε στην απέναντι πλευρά της κλίνης.
 3. Επανατοποθετήστε τη βίδα Allen με την παρεχόμενη περιστροφική λαβή. Αυτή η περιστροφική λαβή πρέπει να παραμείνει μόνιμα ως μέρος της κλίνης. Μην σφίγγετε εντελώς την περιστροφική λαβή. Αφήστε περίπου 0,5 cm διαδρομής (Εικ. 40).
 4. Επαναλάβετε στην απέναντι πλευρά της κλίνης.
 5. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη θέση που φαίνεται παρακάτω, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες 1/4-20 x 1/2" (Εικ. 41).
- ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τους δίσκους.**
6. Επαναλάβετε την εγκατάσταση για τον απέναντι προσαρμογέα (Εικ. 42).
 7. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν στο επίθεμα κλίνης, αγκιστρώνοντας τον προσαρμογέα επάνω στον άξονα της περιστροφικής λαβής. Σφίξτε την περιστροφική λαβή για να ασφαλίσετε. (Εικ. 43)




Εικ. 39




Εικ. 40

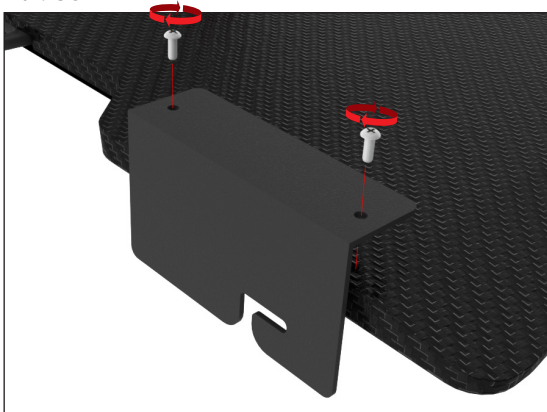

Εικ. 41

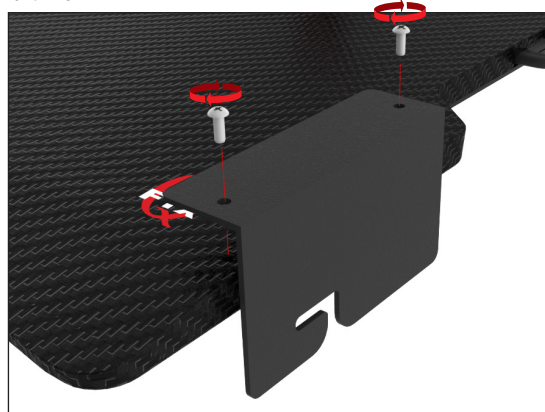

Εικ. 42

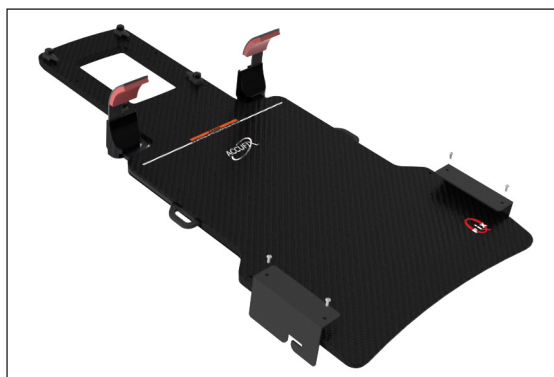


Εικ. 43

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527EXA475

ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤ ΠΛΑΤΟΥΣ 500 MM, ΣΤΕΝΟΥ ΣΤΥΛ ΕΧΑСТ®

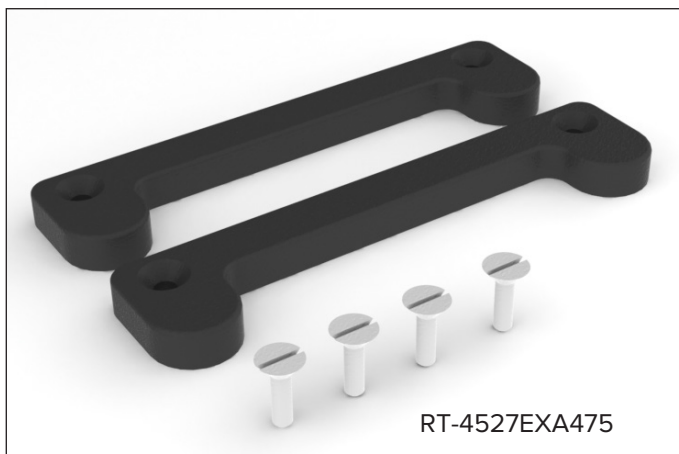

Απαραίτητα εργαλεία: Κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής



ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΤ. Η ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΛΙΝΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.

30

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – 2002950_IFU, Indexing Adapters_EL
CQ Medical | +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 | www.CQmedical.com

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527EXA475

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη θέση που φαίνεται παρακάτω, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες 1/4-20 x 3/4" (Εικ. 44).

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τους δίσκους.

2. Επαναλάβετε την εγκατάσταση για τον απέναντι προσαρμογέα (Εικ. 45).

3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν επάνω στο επίπεδο κλίνης, ευθυγραμμίζοντας τους προσαρμογείς με τις εγκοπές δεικτοδότησης. Πιέστε προς τα κάτω το τεχνολογικό προϊόν μέχρι να ασφαλίσει.



Εικ. 44



Εικ. 45



Εικ. 46


ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527PETCT

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PET/CT PHILIPS GEMINI™ ΚΑΙ GE DISCOVERY™ LS
ΠΛΑΤΟΥΣ 480 MM



RT-4527PETCT

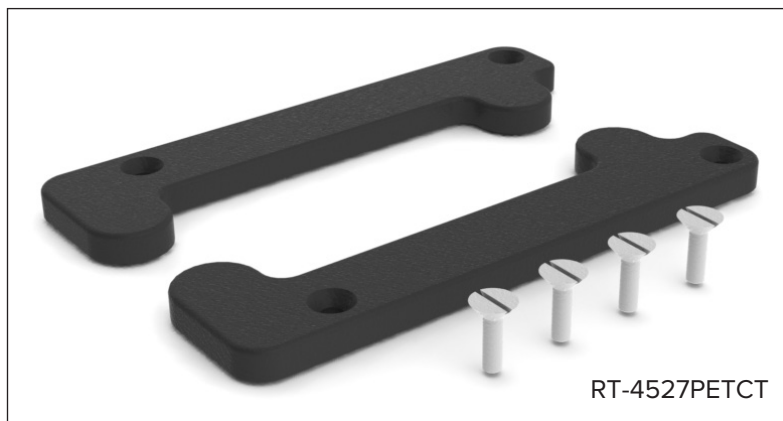

RT-4527PETCT

Απαραίτητα εργαλεία: Κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής



ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ CT. Η ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΛΙΝΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

RT-4527PETCT

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη θέση που φαίνεται παρακάτω, σε δύο από τις οπές, σε απόσταση 140 mm (5,5") μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας 2 βίδες 1/4-20 x 3/4" (Εικ. 47).


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Δεν έχει σημασία ποιο σετ οπών χρησιμοποιείται. Ωστόσο, εάν υπάρχει εγκατεστημένο Hand Grip Array, τότε χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σετ οπών για τους δίσκους.

2. Επαναλάβετε την εγκατάσταση για τον απέναντι προσαρμογέα (Εικ. 48).

3. Τοποθετήστε το τεχνολογικό προϊόν επάνω στο επίθεμα κλίνης, ευθυγραμμίζοντας τους προσαρμογείς με τις εγκοπές δεικτοδότησης. Πιέστε προς τα κάτω το τεχνολογικό προϊόν μέχρι να ασφαλίσει.



Εικ. 47

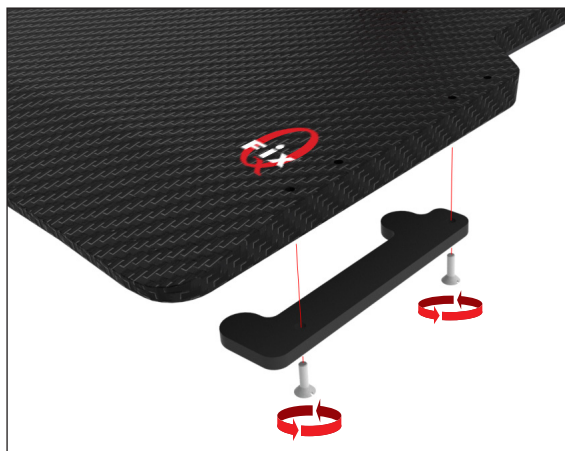

Εικ. 48



Εικ. 49

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΗ

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (Εικ. 50)

1. Αφαιρέστε τις 2 βίδες που ασφαλίζουν τον προσαρμογέα στο Hand Grip Array.
2. Τοποθετήστε τον διορθωτή ανάμεσα στον προσαρμογέα και στο Hand Grip Array, ευθυγραμμίζοντας τις οπές των βιδών με τις οπές του διορθωτή.
3. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες μέχρι να ασφαλίσουν.
4. Συνεχίστε με τις οδηγίες ρύθμισης.

RT-4527LMI3 (Εικ. 51)

1. Αφαιρέστε τις 2 βίδες που ασφαλίζουν τον προσαρμογέα στο Hand Grip Array.
2. Τοποθετήστε τον διορθωτή ανάμεσα στον προσαρμογέα και στο Hand Grip Array, ευθυγραμμίζοντας τις οπές των βιδών με τις οπές του διορθωτή.
3. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες μέχρι να ασφαλίσουν.
4. Συνεχίστε με τις οδηγίες ρύθμισης.



Εικ. 50



Εικ. 51



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com