
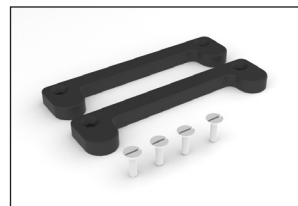
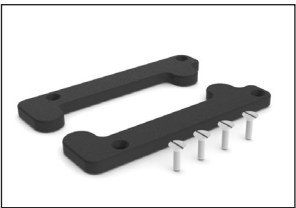
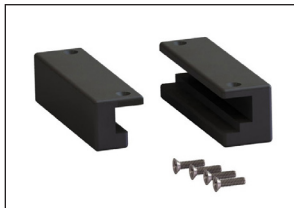
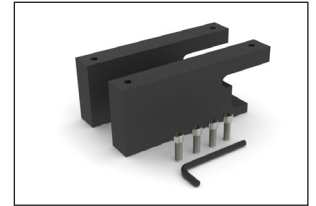
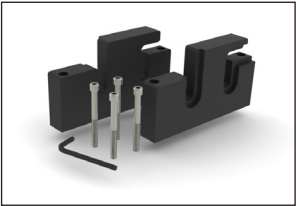
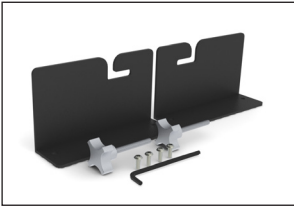
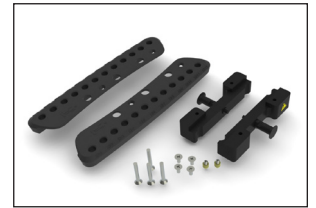
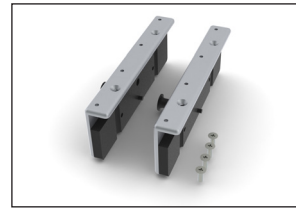
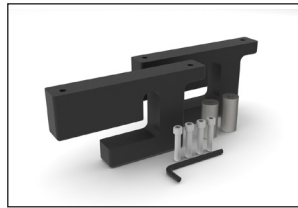


GUÍA DE INSTALACIÓN Y MANUAL DEL USUARIO

Adaptadores de indexación

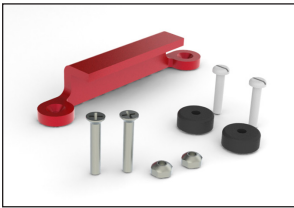

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass y Hand Grip Array son marcas comerciales de Qfix.

Exact® y ETR® son marcas comerciales registradas de Varian Medical Systems.

Medical Intelligence I-Beam es una marca comercial, y Precise® es una marca comercial registrada de Elekta AB.

ZXT y TXT son marcas comerciales de Siemens AG.

Med-Tec Prodigy e IPPS son marcas comerciales de Civco Medical Solutions.

Gemini es una marca comercial de Philips Medical Systems.

Discovery es una marca comercial de GE Medical.

PRECAUCIONES GENERALES

ENUNCIADOS DE ADVERTENCIA

Visite CQmedical.com para consultar un listado de los símbolos y sus definiciones.

! ADVERTENCIA ! NO SE PERMITE NINGUNA MODIFICACIÓN DE ESTE EQUIPO. SI ALGUNA PIEZA DE ESTE PRODUCTO EXPERIMENTA UNA CARGA EXTREMA, PARECE DAÑADA O FUNCIONA DE FORMA INCORRECTA, INTERRUMPA DE INMEDIATO SU USO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON CQ MEDICAL. PARA ELLO, LLAME AL +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 O ENVÍE UN MENSAJE A SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

Los adaptadores están diseñados para funcionar con Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, el tablero CURVE™ y el armazón para la cabeza BoS™.

ADVERTENCIA DE USO GENERAL

El dispositivo NO debe utilizarse en una posición de voladizo más allá del extremo de la mesa cuando se utilizan los siguientes adaptadores para TC:



- RT-4527LTOMO (pág. 7)
- RT-4529M (pág. 20)
- RT-4527MTPCT (pág. 22)
- RT-4527EXA475 (pág. 34)
- RT-4527PETCT (pág. 36)

Si el dispositivo se coloca en posición de voladizo más allá del extremo de la mesa, se puede caer caiga de la mesa y causar lesiones al paciente.

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4527LMI3

ELEKTA/MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ Y ADAPTADOR PARA TOMOTERAPIA

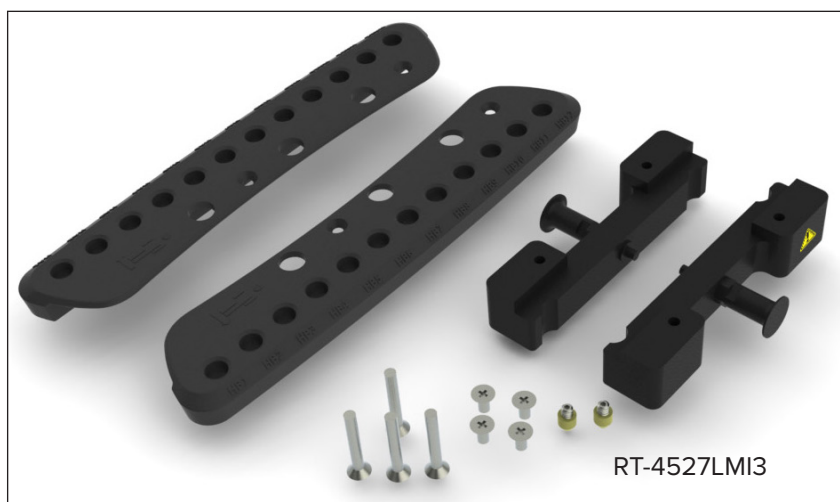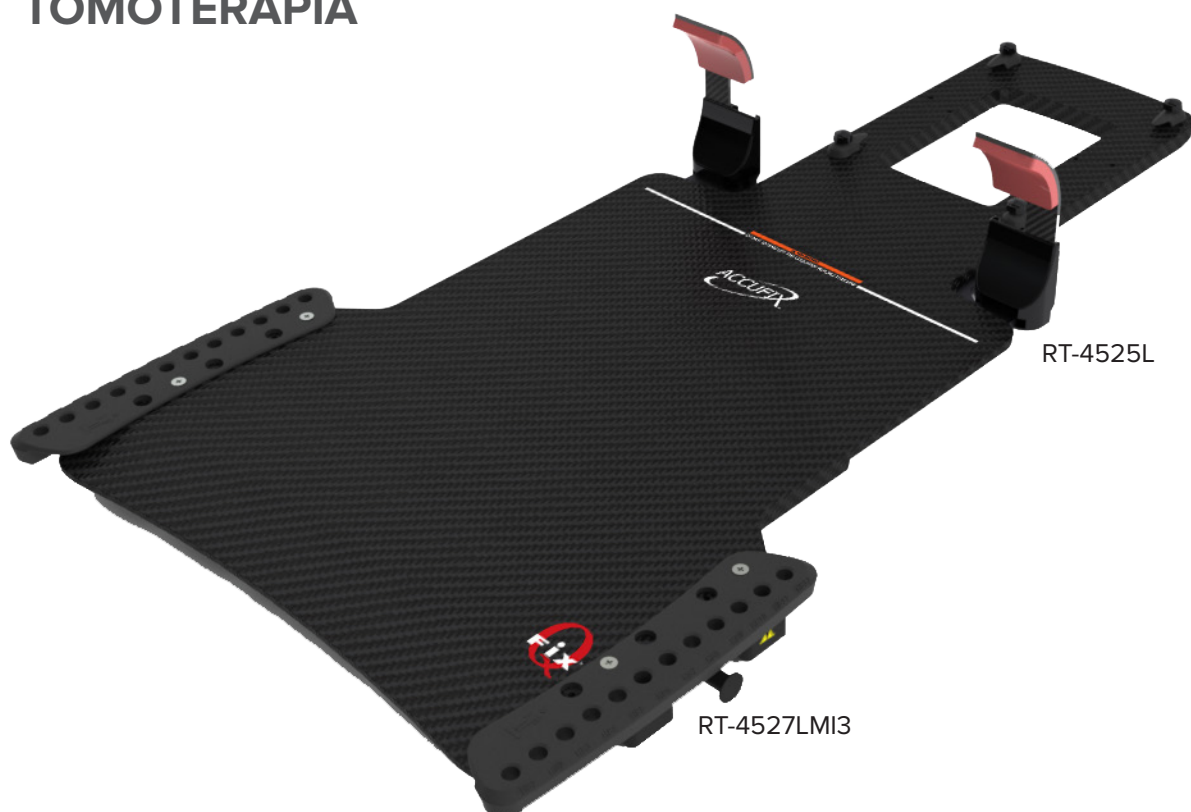

Herramientas necesarias: Destornillador Philips



¡ ADVERTENCIA ! TENGA CUIDADO, YA QUE SE PUEDE PRODUCIR UN PUNTO DE PINZAMIENTO ENTRE EL ADAPTADOR DEL DISPOSITIVO Y LA MESA AL APLICAR PRESIÓN POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE ADVERTENCIA.

4

GUÍA DE INSTALACIÓN Y MANUAL DEL USUARIO – 2002950_IFU, Indexing Adapters_ES

CQ Medical | +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 | www.CQmedical.com

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527LMI3

! NOTA ! Si se instala en un dispositivo de 28 mm de grosor, como el Encompass™, consulte la página 38 para obtener información sobre la instalación de suplementos antes de continuar con la configuración.

1. Instale los adaptadores en cada matriz de agarres manuales utilizando 2 tornillos de ¼-20 x 1 ½" cada uno (Fig. 1).
2. Instale el adaptador de posicionamiento de cono amarillo directamente en la parte inferior del dispositivo (instale uno en cada lado) (Fig. 2 y 2a).
3. Instale las matrices de agarres manuales en el dispositivo, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de ¼-20 x ½" cada uno. (Fig. 3)

¡ NOTA ! Se puede producir un punto de pinzamiento entre el adaptador del dispositivo y la mesa al aplicar presión por encima de la línea de advertencia.

! NOTA ! Para obtener más información sobre cómo instalar las matrices de agarres manuales, consulte la guía de producto y el manual del usuario.

4. Coloque el dispositivo sobre la mesa y alinee el cono amarillo con los orificios de indexación de la superficie superior de la mesa. Gire y tire del pistón para fijar/soltar el dispositivo en la mesa.

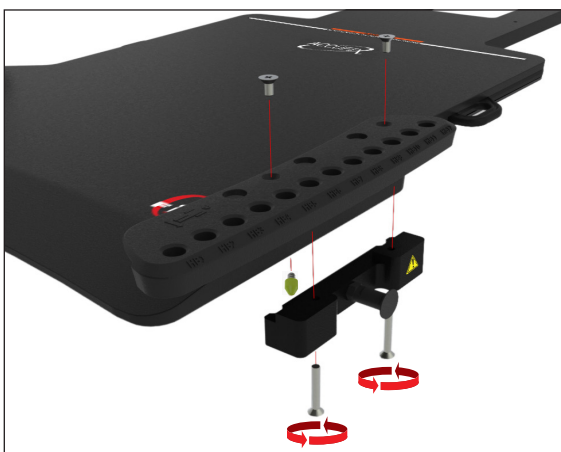


Fig. 1

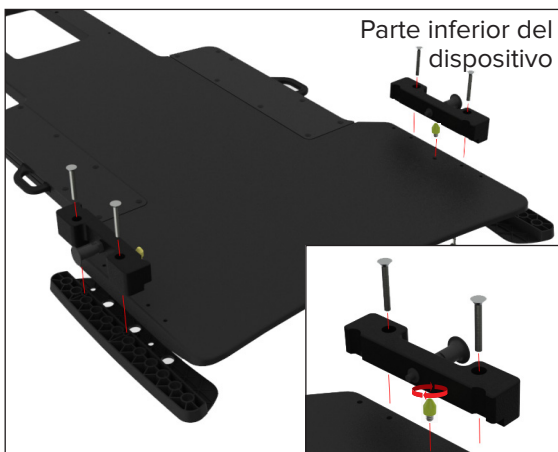


Fig. 2

Fig. 2a

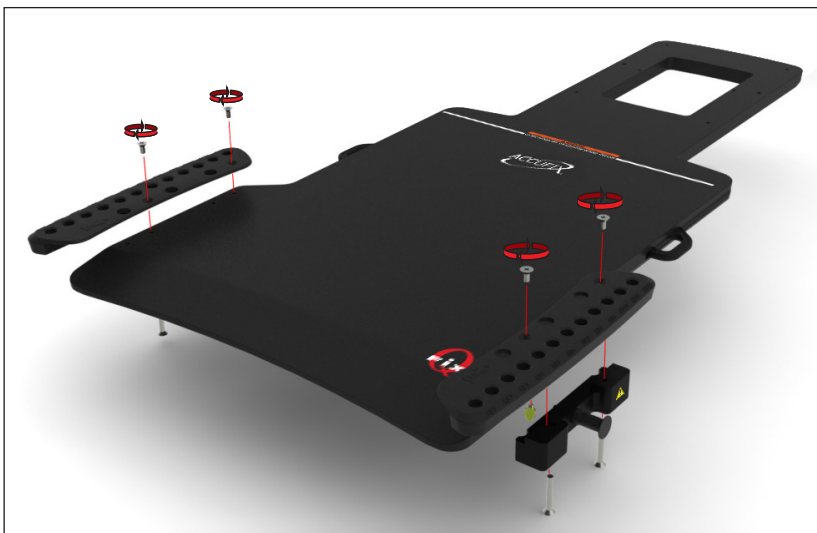


Fig. 3

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527LTOMO



¡ ADVERTENCIA ! EL DISPOSITIVO NO DEBE UTILIZARSE EN UNA POSICIÓN DE VOLADIZO MÁS ALLÁ DEL EXTREMO DE LA MESA CUANDO SE UTILICE ESTE ADAPTADOR; DE LO CONTRARIO, EL DISPOSITIVO PODRÍA CAERSE DE LA MESA Y CAUSAR LESIONES AL PACIENTE.

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527LTOMO

1. Instale el adaptador de posicionamiento de cono amarillo directamente en la parte inferior del dispositivo (instale uno en cada lado) (Fig. 4 y 5).
2. Coloque el dispositivo sobre la mesa y alinee el cono amarillo con los orificios de indexación de la superficie superior de la mesa.



Fig. 4



Fig. 5

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4527MI

ELEKTA/MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ Y ADAPTADOR PARA TOMOTERAPIA



Herramientas necesarias: Destornillador Philips

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4527MI

1. Instale cualquiera de los adaptadores en un lado del dispositivo en la posición que se muestra a continuación; para ello, utilice 2 tornillos de ¼-20 x ½" cada uno. (Fig. 6)

¡ NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para el adaptador.

2. Repita el proceso de instalación con el adaptador opuesto (Fig. 7).

3. Coloque la barra de posicionamiento de 2 pasadores en la posición deseada (una vez fijada, los pasadores de la barra de posicionamiento se alinearán con los orificios de la parte inferior del dispositivo) (Fig. 6, 7 y 8).

4. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, enganche primero el mayor de los dos adaptadores a la mesa y, a continuación, el adaptador más pequeño; después, localice el dispositivo utilizando la barra de posicionamiento de 2 pasadores.

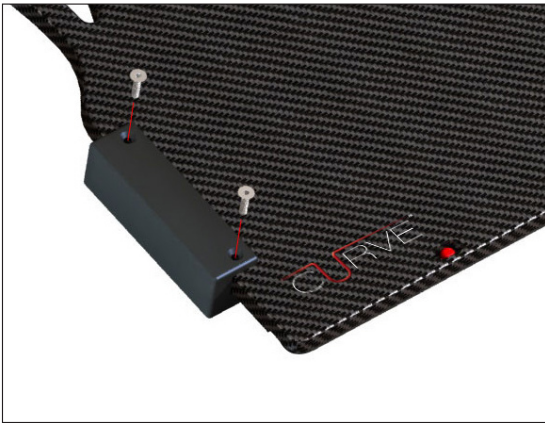


Fig. 6

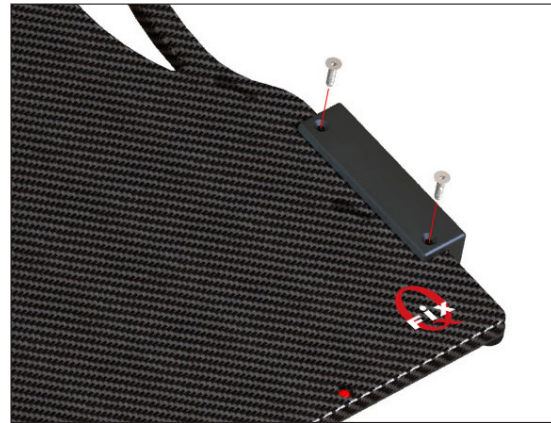



Fig. 7



Fig. 8

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527EXAG

ADAPTADOR VARIAN EXACT®

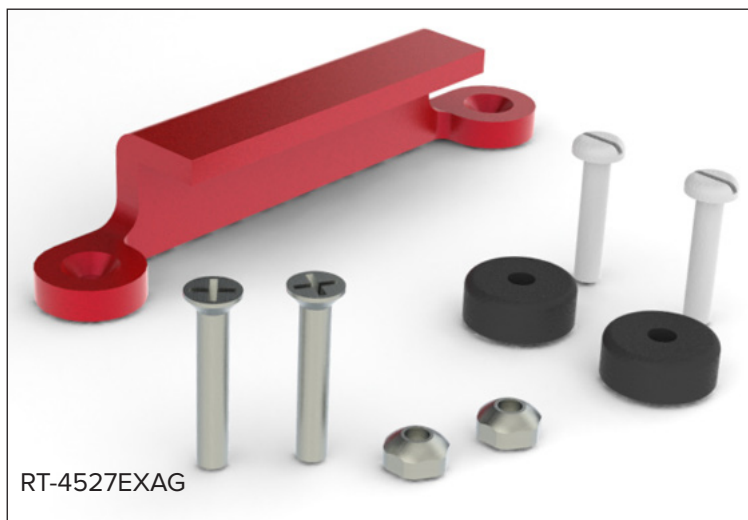

Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza plana Philips

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4527EXAG

1. Instale el adaptador rojo en el dispositivo, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{3}{8}$ ". A continuación, coloque las 2 tuercas de seguridad de $\frac{1}{4}$ -20" en los tornillos de la parte superior del dispositivo (Fig. 9).

! NOTA ! El adaptador se puede instalar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del dispositivo. No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para el adaptador.

2. Instale 2 discos de posicionamiento en el lado opuesto del adaptador de posicionamiento, en los orificios correspondientes, utilizando tornillos de $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{4}$ " (1 para cada uno) (Fig. 10).
3. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, enganche el adaptador rojo a un lado y, a continuación, empuje el lado con los discos de posicionamiento hacia abajo en las muescas de indexación hasta que quede bien fijado.



Fig. 9

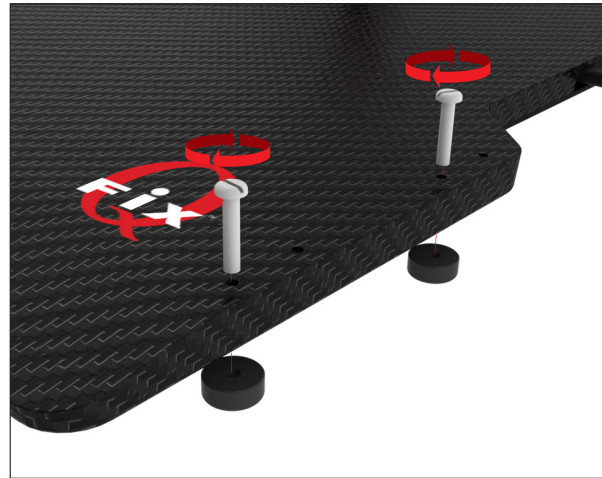


Fig. 10



Fig. 11

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527QFIX

ADAPTADOR QFIX™ KVUE™ Y QUANTUM™



Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza plana
Philips

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4527QFIX

1. Instale el adaptador en el dispositivo, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{4}$ ". Asegúrese de que la parte del adaptador con el saliente esté orientada hacia dentro, de modo que pueda fijarse en el reborde del dispositivo Qfix (Fig. 12).

! NOTA ! El adaptador se puede instalar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del dispositivo. No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para el adaptador.

2. Instale 2 discos de posicionamiento en el lado opuesto del adaptador de posicionamiento, en los orificios correspondientes, utilizando tornillos de $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{4}$ " (1 para cada uno) (Fig. 13).
3. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, enganche el adaptador a un lado de la mesa y, a continuación, empuje el lado con los discos de posicionamiento hacia abajo en las muescas de indexación hasta que quede bien fijado.



Fig. 12

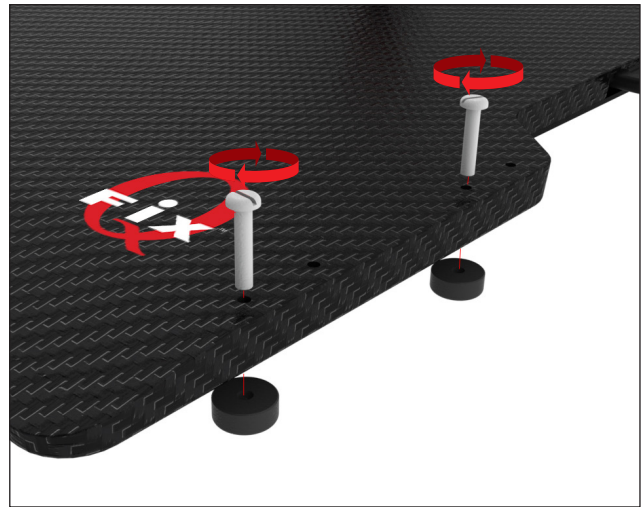



Fig. 13



Fig. 14

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

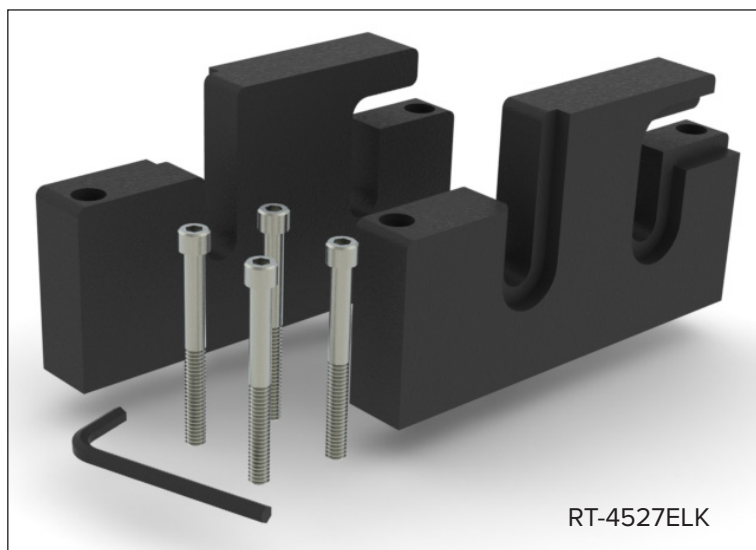

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527ELK

1. Instale el adaptador de forma que la superficie lisa quede en la parte exterior del dispositivo y el adaptador quede en la posición que se muestra a continuación, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de cabeza cilíndrica de ¼-20 x 2 ½" con la llave Allen suministrada (Fig. 14).

! NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para el adaptador.

2. Repita el proceso de instalación con el adaptador opuesto; para ello, mantenga el lado liso del adaptador orientado hacia fuera (Fig. 15).

3. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, enganche el adaptador al soporte de los carriles de accesorios.



Fig. 15

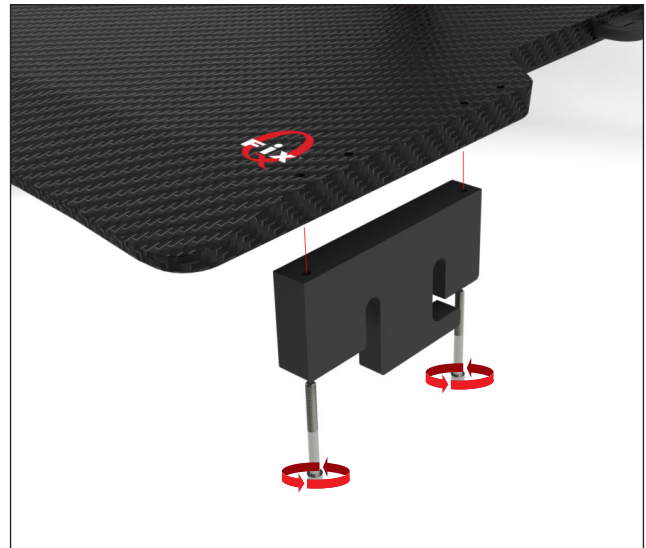


Fig. 16



Fig. 17

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4529M

VARIAN EXACT® COMPATIBLE CON TC



Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza plana



EL DISPOSITIVO NO DEBE UTILIZARSE EN UNA POSICIÓN DE VOLADIZO MÁS ALLÁ DEL EXTREMO DE LA MESA CUANDO SE UTILIZA ESTE ADAPTADOR PARA TC: SI EL DISPOSITIVO SE COLOCA EN POSICIÓN DE VOLADIZO MÁS ALLÁ DEL EXTREMO DE LA MESA, SE PUEDE CAER CAIGA DE LA MESA Y CAUSAR LESIONES AL PACIENTE.

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4529M

1. Instale 2 discos de posicionamiento a cada lado del dispositivo, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando tornillos de ¼-20 x 1 ¼" (1 para cada uno) (Fig. 17).

! NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para los discos.

2. Instale los 2 discos de posicionamiento restantes en el lado opuesto a los dos primeros discos, en los orificios correspondientes, utilizando tornillos de ¼-20 x 1 ¼" (1 para cada uno) (Fig. 18).

3. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, alinee los discos de posicionamiento con las muescas de indexación. Presione el dispositivo hasta que quede bien fijado.

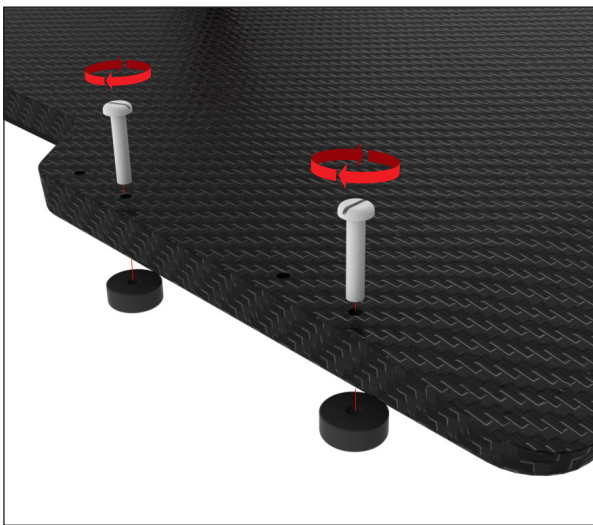


Fig. 18

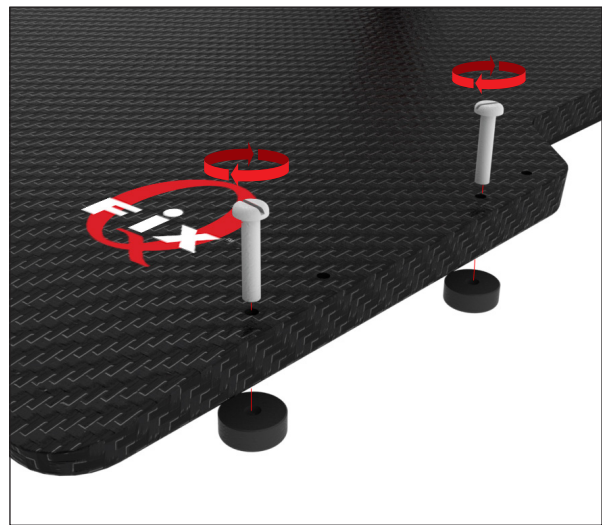


Fig. 19



Fig. 20


MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527MTPCT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ CT



RT-4525L

RT-4527MTPCT

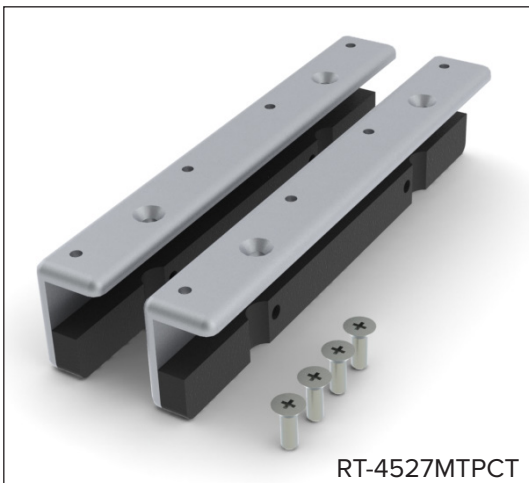

RT-4527MTPCT

Herramientas necesarias: Destornillador
Philips



EL DISPOSITIVO NO DEBE UTILIZARSE EN UNA POSICIÓN DE VOLADIZO MÁS ALLÁ DEL EXTREMO DE LA MESA CUANDO SE UTILIZA ESTE ADAPTADOR PARA TC: SI EL DISPOSITIVO SE COLOCA EN POSICIÓN DE VOLADIZO MÁS ALLÁ DEL EXTREMO DE LA MESA, SE PUEDE CAER CAIGA DE LA MESA Y CAUSAR LESIONES AL PACIENTE.

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4527MTPCT

1. Instale el adaptador en la posición que se muestra a continuación, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de 1/4-20 x 3/4" (Fig. 20 y 21).

! NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para el adaptador.

2. Repita el proceso de instalación con el adaptador opuesto; para ello, mantenga el lado liso del adaptador orientado hacia fuera.

3. Instale el dispositivo; para ello, alinee los adaptadores con la indexación a lo largo del lateral de la mesa. Presione el dispositivo hasta que quede bien fijado.

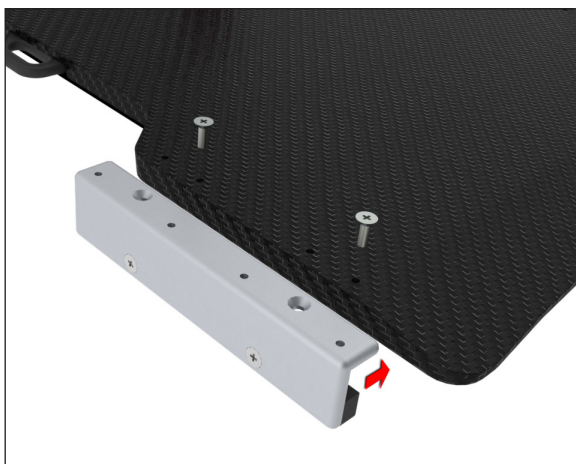


Fig. 21

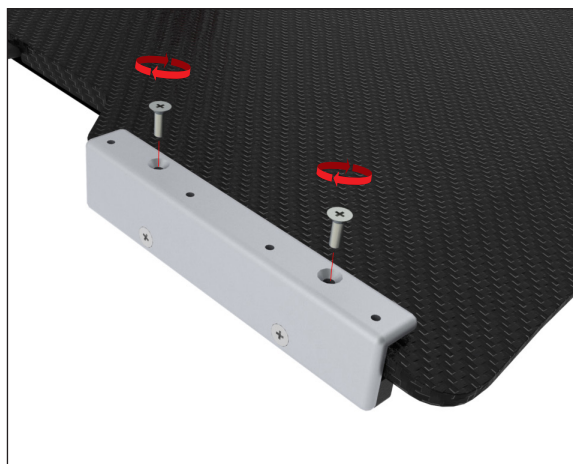



Fig. 22



Fig. 23

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

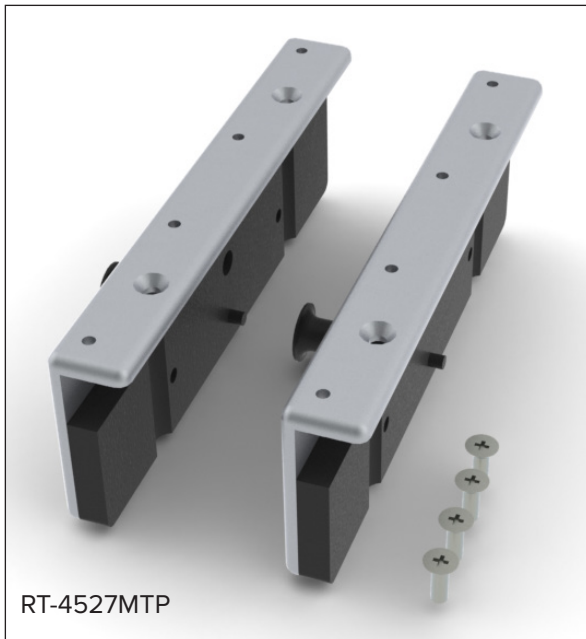

Herramientas necesarias: Destornillador
Philips

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4527MTP

1. Instale el adaptador en la posición que se muestra a continuación, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de 1/4-20 x 3/4" (Fig. 24 y 25).

! NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para el adaptador.

2. Repita el proceso de instalación con el adaptador opuesto.

3. Instale el dispositivo; para ello, alinee los adaptadores con la indexación a lo largo del lateral de la mesa. Gire y tire del pistón para fijar/soltar el dispositivo en la mesa.



Fig. 24




Fig. 25



Fig. 26

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

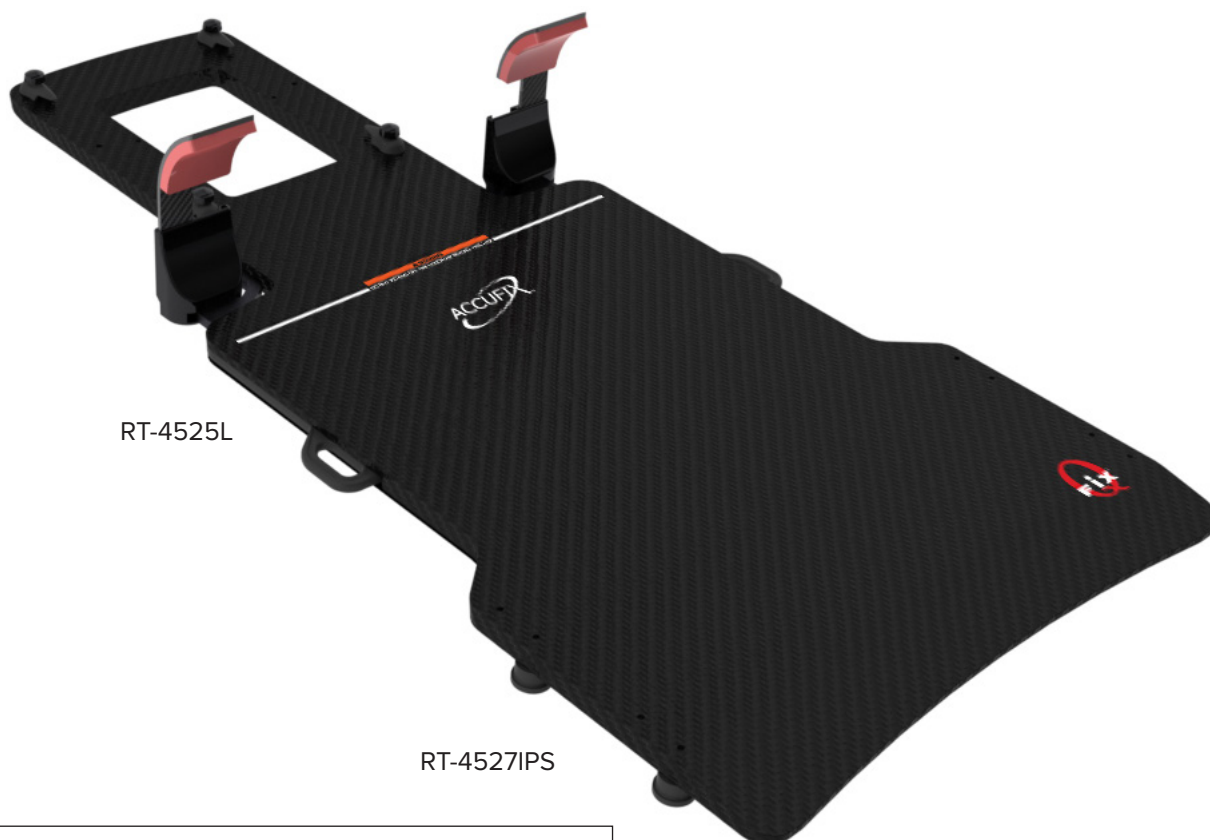

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527IPS

1. Instale 2 discos de posicionamiento (con reborde) a cada lado del dispositivo, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando tornillos de $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{4}$ " (1 para cada uno) (Fig. 27).

! NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para los discos.

2. Instale los 2 discos de posicionamiento restantes (sin reborde) en el lado opuesto a los dos primeros discos, en los orificios correspondientes, utilizando tornillos de $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{4}$ " (1 para cada uno) (Fig. 28).

3. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, alinee los discos con las muescas de indexación y, a continuación, enganche primero los discos con reborde sobre la mesa. Presione el otro lado hasta que el dispositivo esté bien fijado.

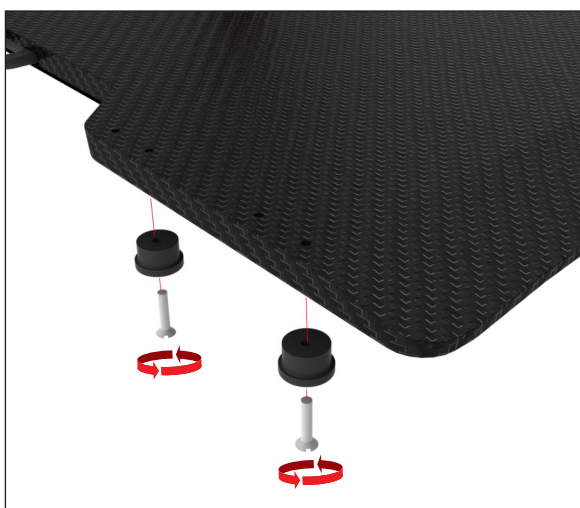


Fig. 27

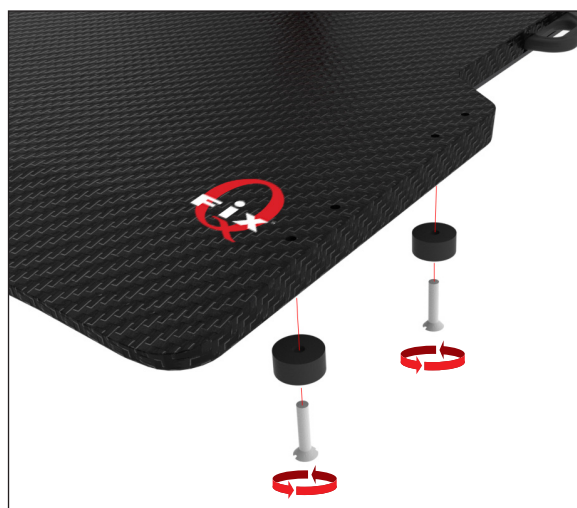



Fig. 28



Fig. 29

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT

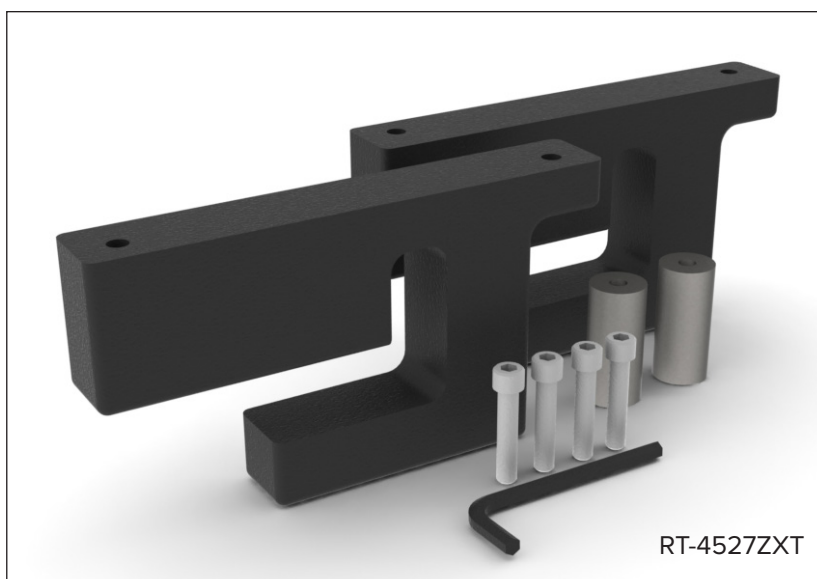

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527ZXT

1. Cambie el soporte cuadrado de la mesa ZXT por el soporte redondo suministrado (Fig. 30).
2. Instale el adaptador en la posición que se muestra a continuación, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de cabeza cilíndrica de ¼-20 x 1¼" con la llave Allen suministrada (Fig. 31).

! NOTA ! Hay un adaptador derecho y otro izquierdo; asegúrese de que, una vez instalado, el adaptador quede alineado con el lateral del dispositivo (Fig. 32).

¡ NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para los discos.

3. Repita el proceso de instalación con el adaptador opuesto (Fig. 33).
4. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, enganche el adaptador al soporte de los carriles de accesorios (Fig. 34).

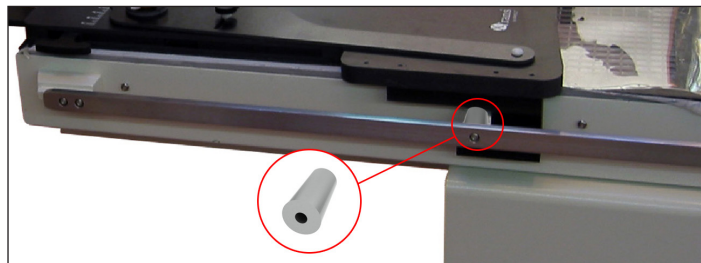


Fig. 30



Fig. 31

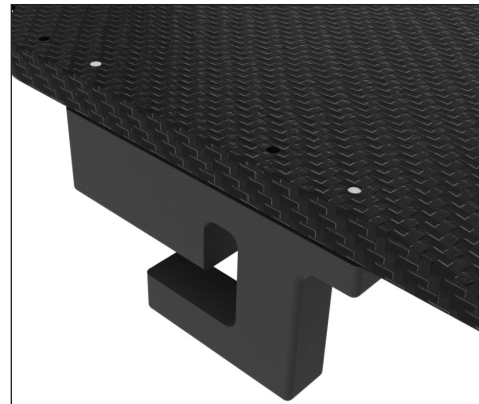


Fig. 32

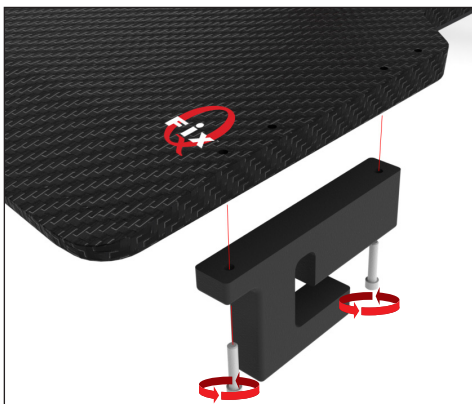




Fig. 33



Fig. 34

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527SKD

SIEMENS KD

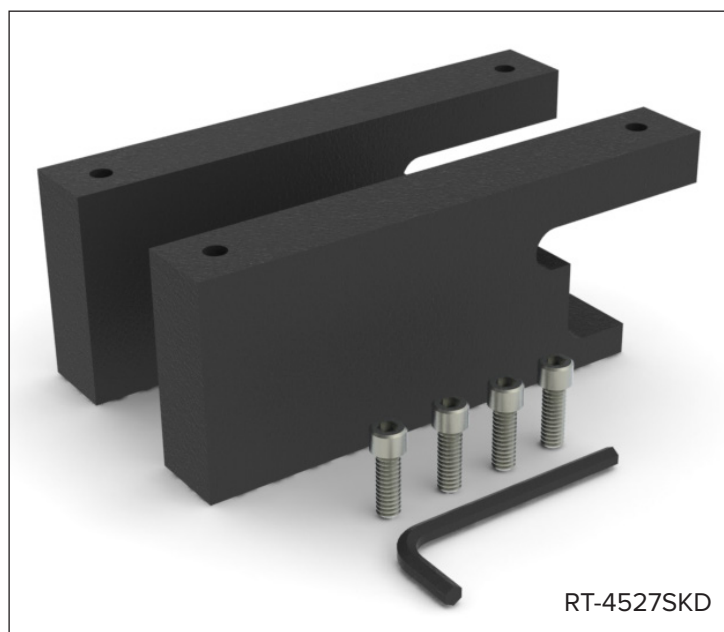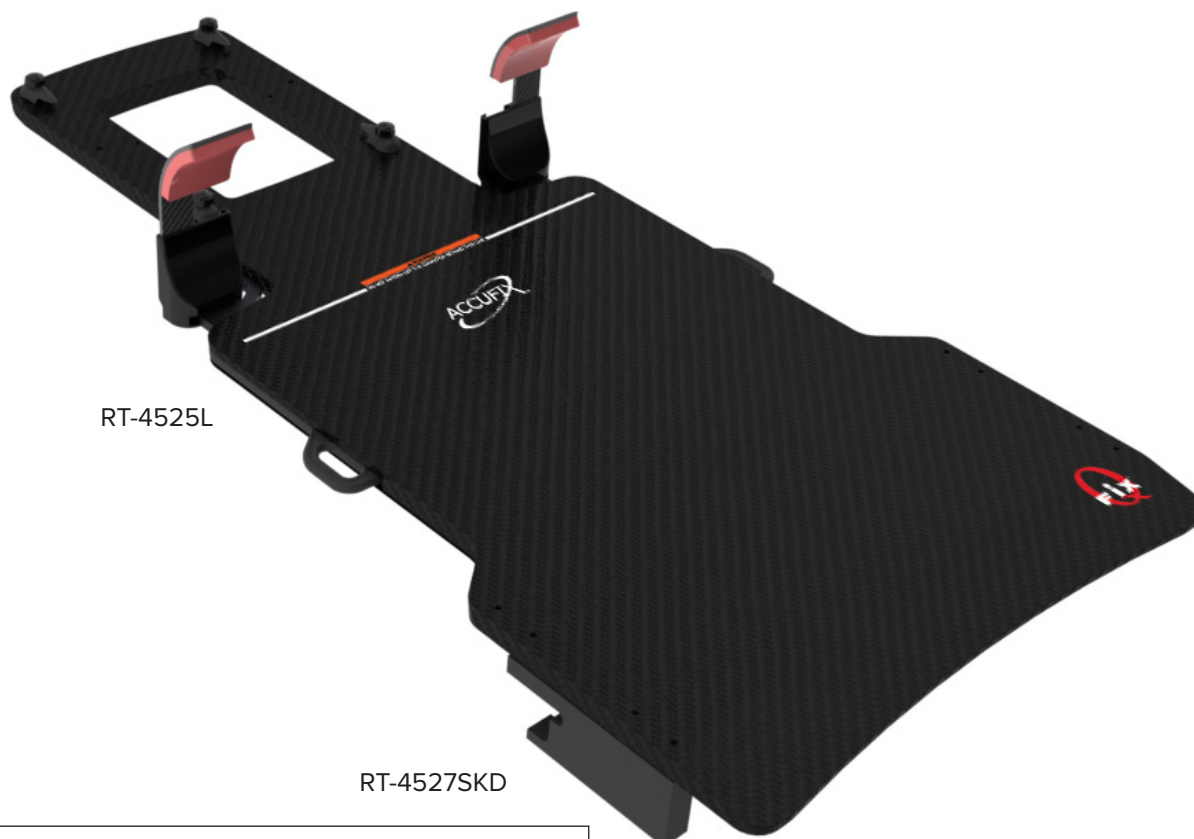

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4527SKD

1. Instale el adaptador en la posición que se muestra a continuación, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de cabeza cilíndrica de ¼-20 x ¾" con la llave Allen suministrada (Fig. 35).

! NOTA ! Hay un adaptador derecho y otro izquierdo; asegúrese de que, una vez instalado, el adaptador quede alineado con el lateral del dispositivo (Fig. 36).

¡ NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para los discos.

2. Repita el proceso de instalación con el adaptador opuesto (Fig. 37).

3. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, enganche el adaptador al soporte de los carriles de accesorios.



Fig. 35

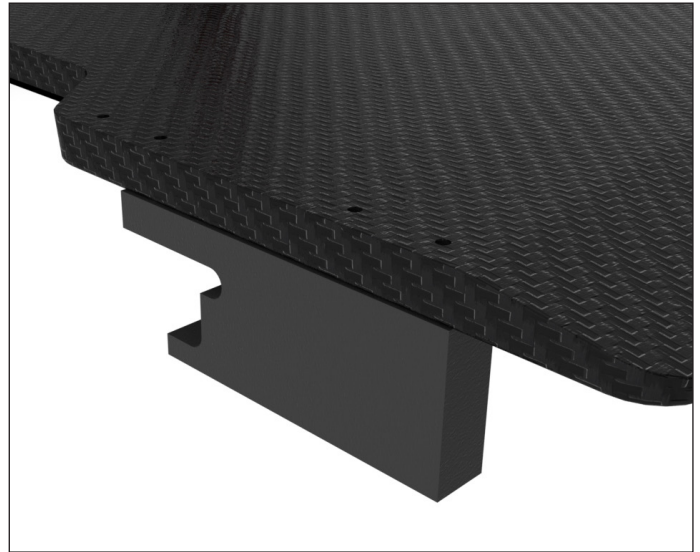


Fig. 36




Fig. 37



Fig. 38

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527ETRJ

VARIAN ETR

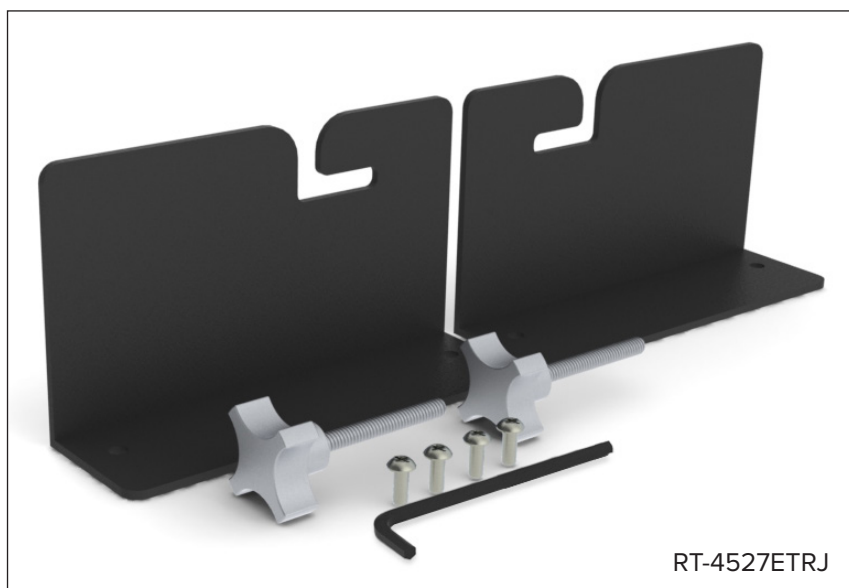

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527ETRJ

1. Retire el tercer tornillo Allen del extremo superior de la mesa ETR con la llave Allen suministrada (Fig. 39).
 2. Repita el procedimiento en el lado opuesto de la mesa.
 3. Cambie el tornillo Allen por la rueda suministrada. Esta rueda debe permanecer fija como parte de la mesa. No la apriete por completo; deje unos 0,5 cm de recorrido (Fig. 40).
 4. Repita el procedimiento en el lado opuesto de la mesa.
 5. Instale el adaptador en la posición que se muestra a continuación, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de ¼-20 x ½" (Fig. 41).
- ! NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para los discos.**
6. Repita el proceso de instalación con el adaptador opuesto (Fig. 42).
 7. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, enganche el adaptador al eje de la rueda. Apriete la rueda para fijarlo (Fig. 43).



Fig. 39



Fig. 40

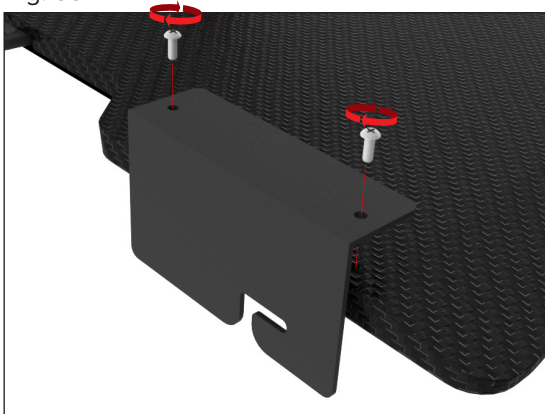


Fig. 41

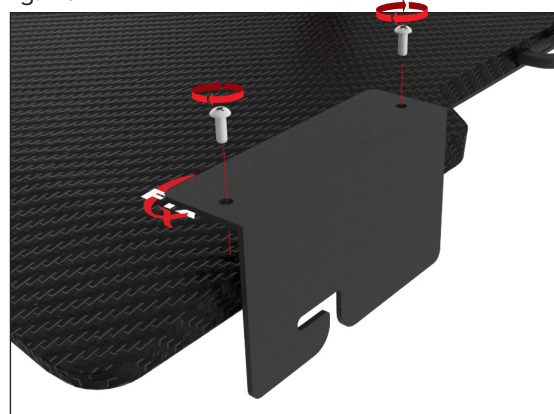


Fig. 42


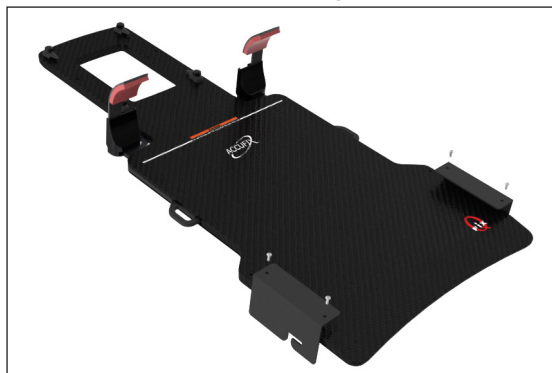


Fig. 43

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527EXA475

CUBIERTA PARA TC INDEXADA DE 500 MM DE ANCHO, ESTILO
NARROW EXACT®

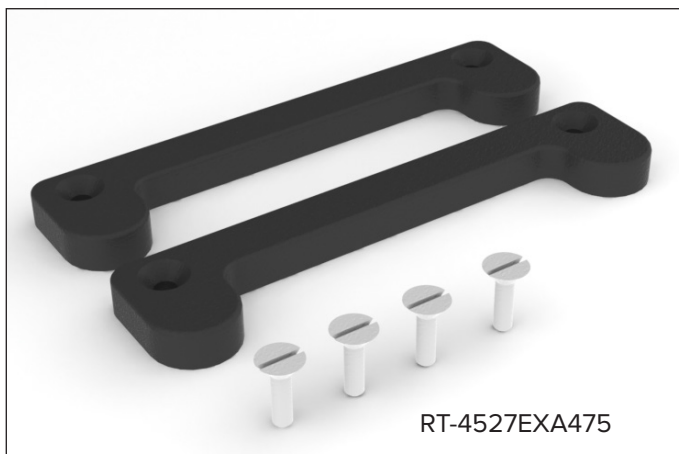

Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza plana



EL DISPOSITIVO NO DEBE UTILIZARSE EN UNA POSICIÓN DE VOLADIZO MÁS ALLÁ DEL EXTREMO DE LA MESA CUANDO SE UTILIZA ESTE ADAPTADOR PARA TC: SI EL DISPOSITIVO SE COLOCA EN POSICIÓN DE VOLADIZO MÁS ALLÁ DEL EXTREMO DE LA MESA, SE PUEDE CAER CAIGA DE LA MESA Y CAUSAR LESIONES AL PACIENTE.

MONTAJE DEL ADAPTADOR

RT-4527EXA475

1. Instale el adaptador en la posición que se muestra a continuación, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de 1/4-20 x 3/4" (Fig. 44).

! NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para los discos.

2. Repita el proceso de instalación con el adaptador opuesto (Fig. 45).

3. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, alinee los adaptadores con las muescas de indexación. Presione el dispositivo hasta que quede bien fijado.



Fig. 44





Fig. 45



Fig. 46

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527PETCT

CUBIERTA PARA PET/TC PHILIPS GEMINI™ Y GE DISCOVERY™ LS
DE 480 MM DE ANCHO

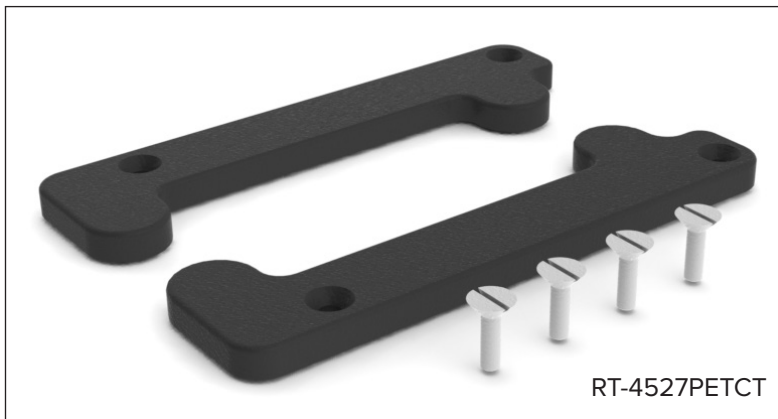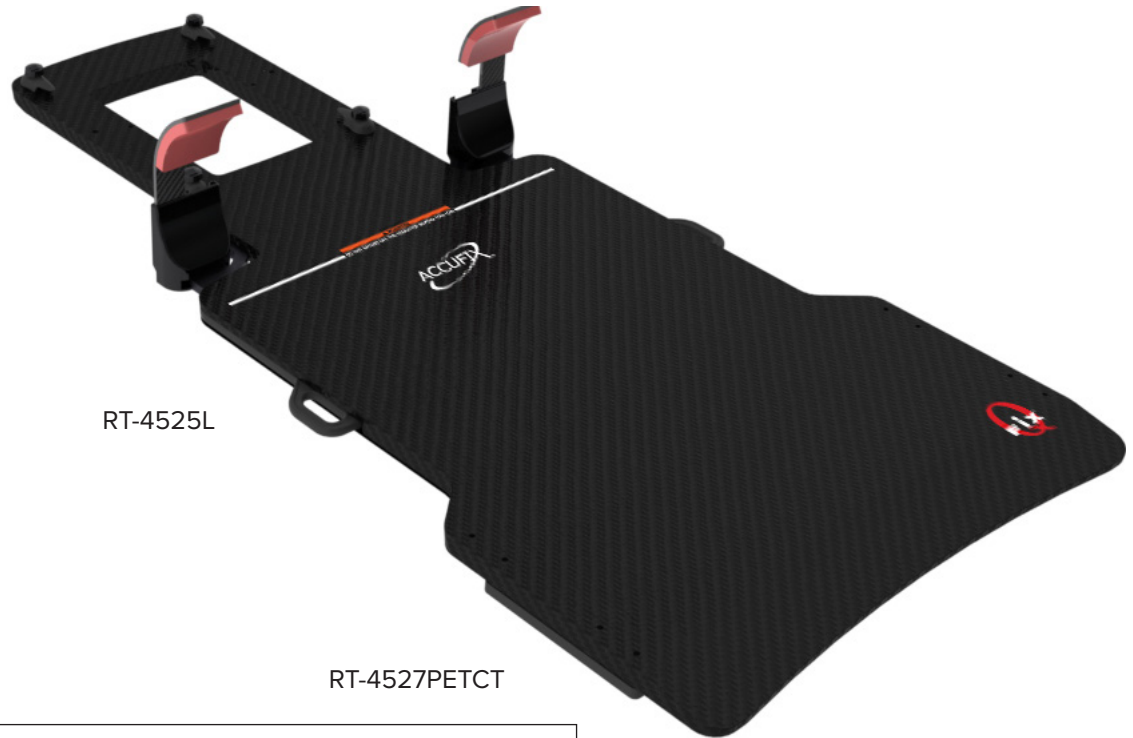

Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza plana



EL DISPOSITIVO NO DEBE UTILIZARSE EN UNA POSICIÓN DE VOLADIZO MÁS ALLÁ DEL EXTREMO DE LA MESA CUANDO SE UTILIZA ESTE ADAPTADOR PARA TC: SI EL DISPOSITIVO SE COLOCA EN POSICIÓN DE VOLADIZO MÁS ALLÁ DEL EXTREMO DE LA MESA, SE PUEDE CAER CAIGA DE LA MESA Y CAUSAR LESIONES AL PACIENTE.

MONTAJE DEL ADAPTADOR RT-4527PETCT

1. Instale el adaptador en la posición que se muestra a continuación, en dos de los orificios separados por una distancia de 140 mm (5,5"), utilizando 2 tornillos de ¼-20 x ¾" (Fig. 47).

! NOTA ! No importa qué conjunto de orificios se utilicen; sin embargo, si hay una matriz de agarres manuales instalada, utilice el conjunto de orificios disponible para los discos.

2. Repita el proceso de instalación con el adaptador opuesto (Fig. 48).

3. Instale el dispositivo sobre la mesa; para ello, alinee los adaptadores con las muescas de indexación. Presione el dispositivo hasta que quede bien fijado.



Fig. 47



Fig. 48



Fig. 49

INSTALACIÓN DE SUPLEMENTOS

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (Fig. 50)

1. Retire los 2 tornillos que fijan el adaptador a la matriz de agarres manuales.
2. Coloque el suplemento entre el adaptador y la matriz de agarres manuales. Asegúrese de que los orificios de los tornillos estén alineados con los orificios del suplemento.
3. Vuelva a instalar los dos tornillos hasta que estén bien fijados.
4. Siga las instrucciones de montaje.

RT-4527LMI3 (Fig. 51)

1. Retire los 2 tornillos que fijan el adaptador a la matriz de agarres manuales.
2. Coloque el suplemento entre el adaptador y la matriz de agarres manuales. Asegúrese de que los orificios de los tornillos estén alineados con los orificios del suplemento.
3. Vuelva a instalar los dos tornillos hasta que estén bien fijados.
4. Siga las instrucciones de montaje.



Fig. 50



Fig. 51



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com