
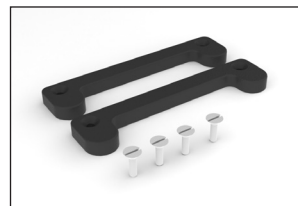
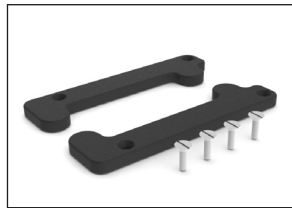
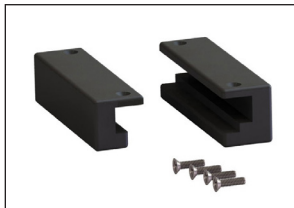
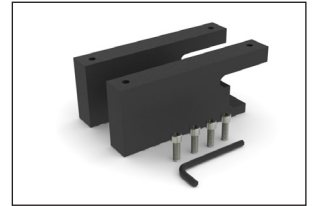
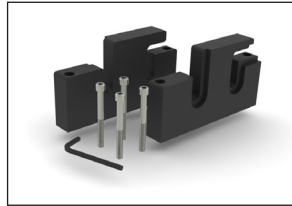
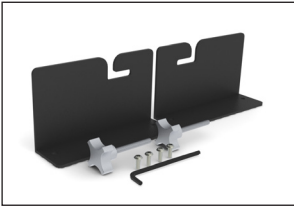
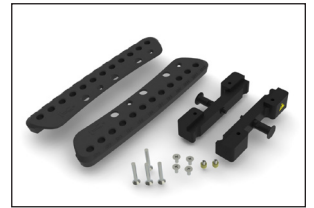
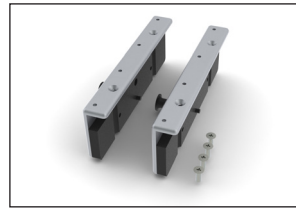
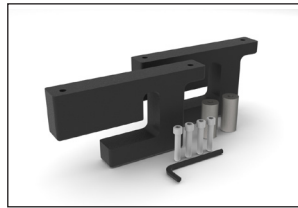


ASENNUSOHJEET JA KÄYTTÖOPAS

Indeksointisovittimet

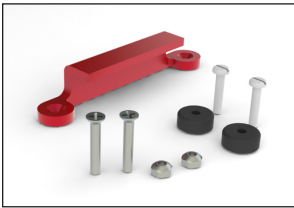

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass ja Hand Grip Array ovat Qfixin tavaramerkkejä.

Exact® ja ETR® Varian Medical Systemsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Medical Intelligence I-Beam on Elekta AB:n tavaramerkki ja Precise® on Elekta AB:n rekisteröity tavaramerkki.

ZXT ja TXT ovat Siemens AG:n tavaramerkkejä.

Med-Tec Prodigy ja IPPS ovat Civco Medical Solutions -yhtiön tavaramerkkejä.

Gemini on Philips Medical Systems -yhtiön tavaramerkki.

Discovery on GE Medicalin tavaramerkki.

YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSLAUSEKKEET

Symboliluettelo ja symbolien määritelmät löytyvät osoitteesta CQmedical.com.

! VAROITUS ! LAITTEeseen EI SAA TEHDÄ MUUTOKSIA. JOS TÄMÄN LAITTEEN JOTAKIN OSAA KUORMITETAAN LIIKAA, SE NÄYTTÄÄ VAURIOITUNEelta TAI TOIMII VIRHEELLISESTI, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYS CQ MEDICALIIN, PUH. +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 TAI SÄHKÖPOSTI SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

Sovittimet on suunniteltu toimimaan seuraavien laitteiden kanssa: Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, CURVE™ Board ja BoS™ Headframe.

YLEINEN KÄYTTÖVAROITUS

Laitetta EI saa ulottaa hoitopöydän pään yli, kun käytetään seuraavia TT-sovittimia:

- RT-4527LTOMO (s. 7)
- RT-4529M (s. 20)
- RT-4527MTPCT (s. 22)
- RT-4527EXA475 (s. 34)
- RT-4527PETCT (s. 36)

Jos laite ulotetaan hoitopöydän pään yli, se voi pudota hoitopöydältä ja vahingoittaa potilasta.

SOVITTIMEN ASETUKSET


RT-4527LMI3

ELEKTA / MEDICAL
TOMOTERAPIASOVITIN

INTELLIGENCE

I-BEAM™

JA

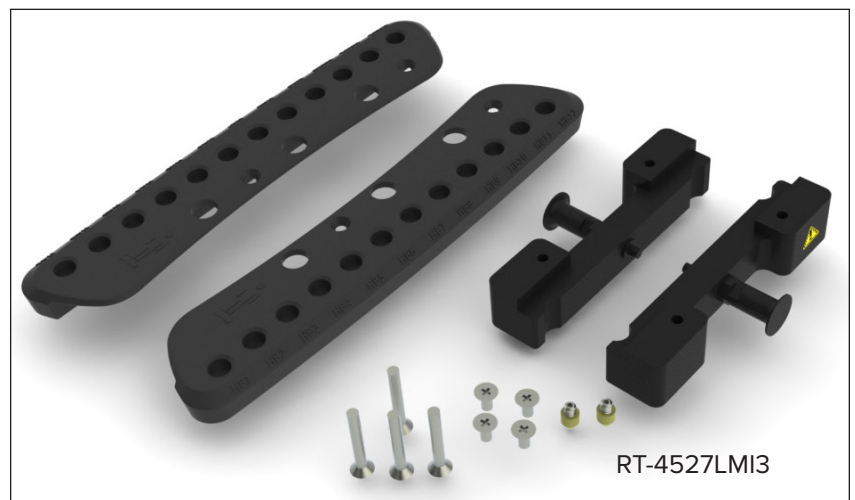

Tarvittavat työkalut: Ristipääruuvitaltta



! VAROITUS ! OLE VAROVAINEN, SILLÄ LAITTEEN SOVITTIMEN JA HOITOPÖYDÄN VÄLIIN VOI JÄÄDÄ PURISTUSKOHTA, KUN VAROITUSVIIVAN YLÄPUOLELLE KOHDISTETAAN PAINETTA.

SOVITTIMEN ASETUKSET

RT-4527LMI3


! HUOMAUTUS ! Jos asennat laitetta 28 mm paksuun laitteeseen, kuten Encompass™-laitteeseen, katso sivulta 38 kiilan asennusohjeet ennen asennuksen jatkamista.

1. Asenna sovittimet kuhunkin Hand Grip Array -järjestelmään käyttäen kahta ¼-20 x 1½" -kokoista ruuvia (2 ruuvia per järjestelmä) (kuva 1).
2. Asenna keltainen kartiosovitin suoraan laitteen pohjaan (asenna yksi kummallekin puolelle). (Kuvat 2 ja 2a)
3. Asenna Hand Grip Array -järjestelmät laitteeseen kiinnittämällä ne kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään kahdella ¼-20 x ½" -koon ruuvilla (2 ruuvia per järjestelmä). (Kuva 3)


! HUOMAUTUS ! Laitteen sovittimen ja hoitopöydän väliin voi jäädä puristuskohta, kun varoitusviivan yläpuolelle kohdistetaan painetta.

! HUOMAUTUS ! Lisätietoja Hand Grip Array -järjestelmien asentamisesta on Hand Grip Array -järjestelmän tuoteoppaassa ja käyttöoppaassa.


4. Aseta laite hoitopöydälle kohdistamalla keltainen kartio hoitopöydän yläpinnan indeksointireikien kanssa. Kiinnitä laite hoitopöytään tai irrota se siitä kiertämällä ja vetämällä mäntää.

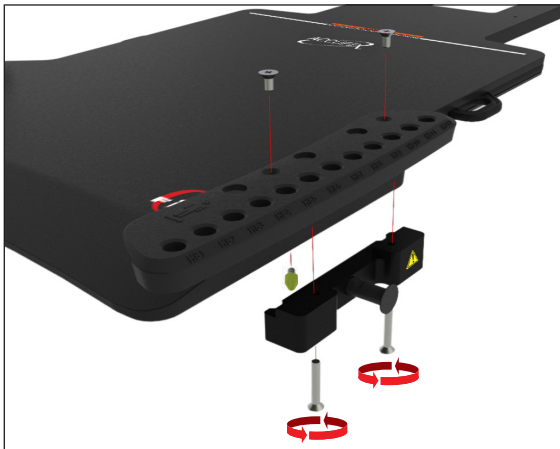


Kuva 1

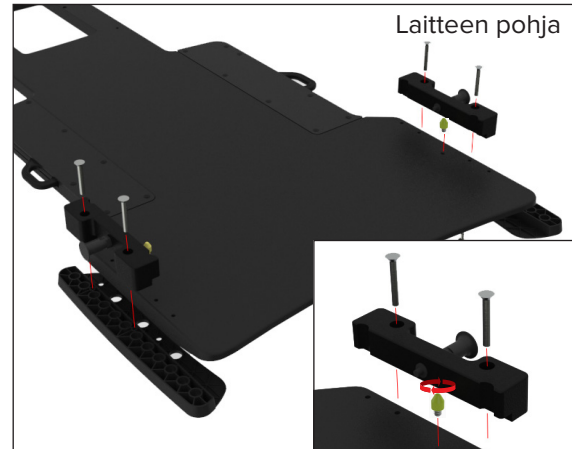

Kuva 2

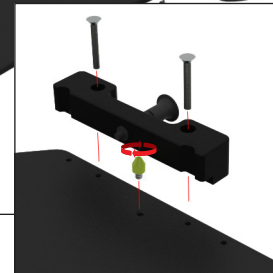

Kuva 2a

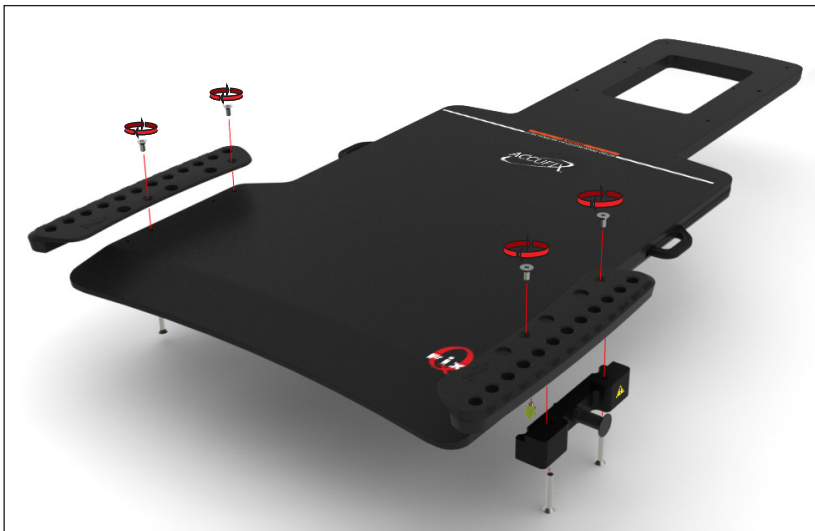

Kuva 3

SOVITTIMEN ASETUKSET

RT-4527LTOMO




! VAROITUS ! LAITETTA EI SAA ULOTTA A HOITOPÖYDÄN PÄÄN YLI SOVITTIMEN KÄYTÖN AIKANA. JOS SOVITINTA KÄYTETÄÄN, LAITE VOI PUDOTA HOITOPÖYDÄLTÄ JA VAHINGOITTA A POTILASTA.

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527LTOMO

1. Asenna keltainen kartiosovitin suoraan laitteen pohjaan (asenna yksi kummallekin puolelle) (kuvat 4 ja 5).
2. Aseta laite hoitopöydälle kohdistamalla keltainen kartio hoitopöydän yläpinnan indeksointireikien kanssa.

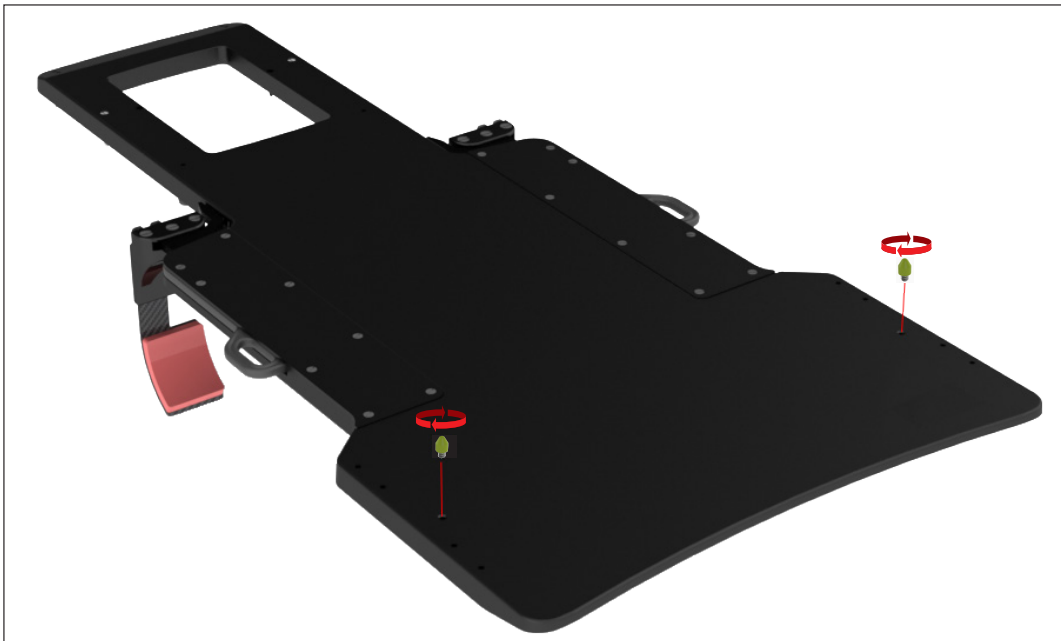

Kuva 4



Kuva 5

SOVITTIMEN KOKOONPANO


RT-4527MI

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ -SOVITIN JA
TOMOTERAPIASOVITIN



RT-4527MI

Käytettäväksi vain
CURVE™ Board
-laitteen kanssa

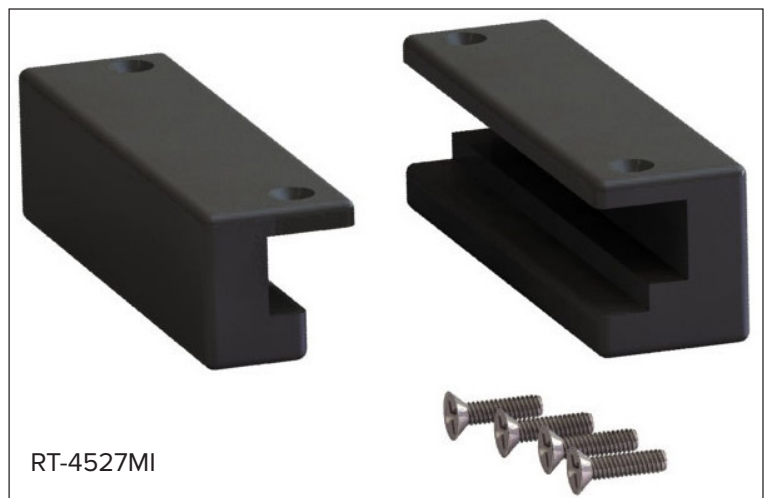

RT-4527MI

Tarvittavat työkalut: Ristipääruuvitaltta


SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527MI


1. Asenna jompikumpi sovitin laitteen toiselle puolelle alla osoitettuun kohtaan kahdella ¼-20 x ½" -koon ruuvilla (2 ruuvia per sovitin). (Kuva 6)

! HUOMAUTUS ! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -I on asennettu, käytä sovittimelle käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna toinen sovitin (kuva 7).
3. Aseta 2-nastainen paikannintanko haluttuun kohtaan (kun kiinnitys on suoritettu, paikannintangon tapit ovat kohdakkain laitteen pohjassa olevien reikien kanssa) (kuvat 6, 7 ja 8).
4. Asenna laite hoitopöytään kiinnittämällä ensin suurempi sovitin hoitopöytään, sitten pienempi sovitin, ja kohdista laite kaksinastaisella kohdistustangolla.

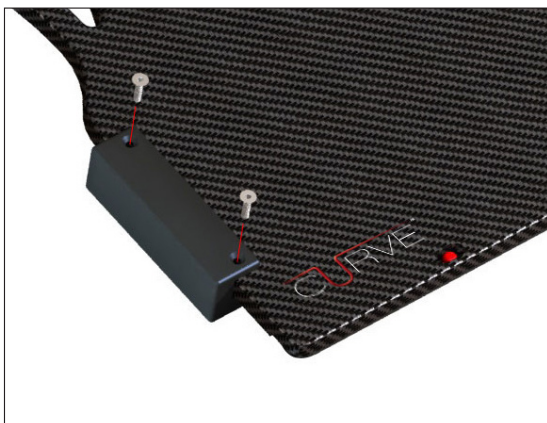

Kuva 6

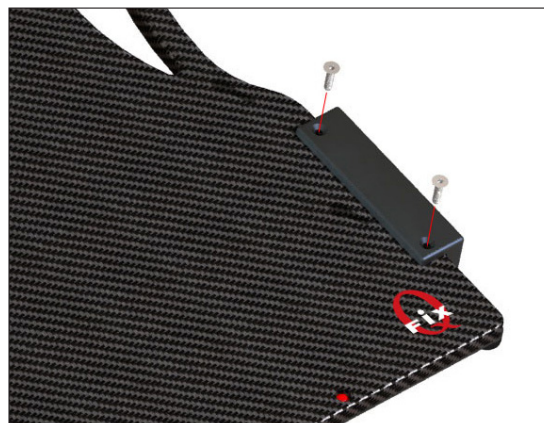

Kuva 7




Kuva 8

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527EXAG

VARIAN EXACT® -SOVITIN

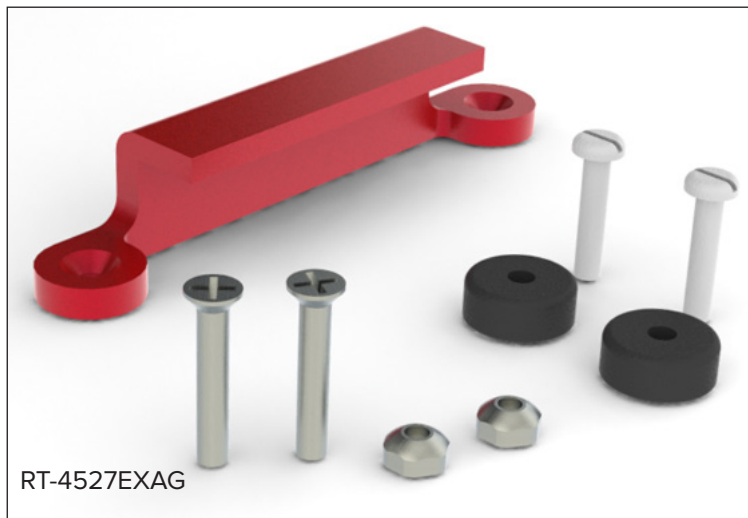

Tarvittavat työkalut: Risti- ja tasapäinen ruuvitaltta

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527EXAG


1. Asenna laitteeseen punainen sovitin. Se asennetaan kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään käyttämällä kahta $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{3}{8}$ " -koon ruuvia. Kiinnitä sitten kaksi $\frac{1}{4}$ -20-koon turvamutteria ruuveihin laitteen yläpuolelta (kuva 9).

! HUOMAUTUS ! Sovitin voidaan asentaa laitteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -I on asennettu, käytä sovittimelle käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna 2 kohdistuslevyä kohdistussovittimen vastakkaiselle puolelle vastaaviin reikiin $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{4}$ " -koon ruuveilla (1 ruuvi per levy) (kuva 10).
3. Asenna laite hoitopöytään kiinnittämällä punainen sovitin toiselle puolelle. Työnnä sitten kohdistuslevyt sisältävä puoli indeksointiloviin, kunnes laite on tukevasti paikallaan.



Kuva 9

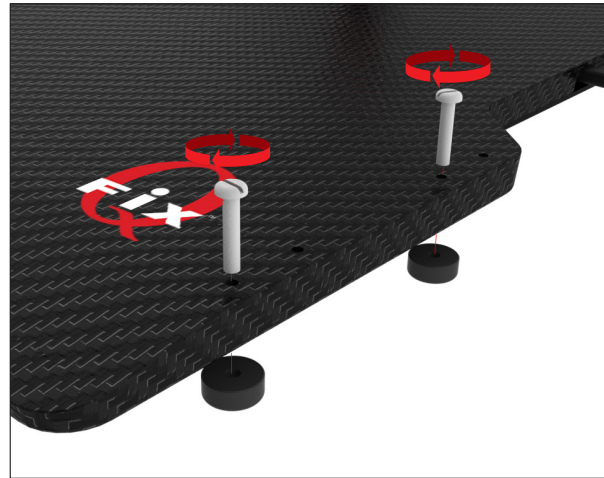

Kuva 10



Kuva 11

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527QFIX

QFIX™ KVUE™ - JA QUANTUM™ -SOVITIN



Tarvittavat työkalut: Risti- ja tasapäinen ruuvitaltta

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527QFIX

1. Asenna sovitin laitteeseen kiinnittämällä se kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään kahdella 1/4-20 x 3/4" -koon ruuvilla. Varmista, että sovittimen ulkonema osoittaa sisäänpäin, jotta se lukittuu Qfix-laitteen reunukseen (kuva 12).


! HUOMAUTUS ! Sovitin voidaan asentaa laitteen oikealle tai vasemmalle puolelle. Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -I on asennettu, käytä sovittimelle käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna 2 kohdistuslevyä kohdistussovittimen vastakkaiselle puolelle vastaaviin reikiin 1/4-20 x 1 1/4" -koon ruuveilla (1 ruuvi per levy) (kuva 13).

3. Asenna laite hoitopöytään kiinnittämällä sovitin hoitopöydän toiselle puolelle. Työnnä sitten kohdistuslevyt sisältävä puoli indeksointiloviin, kunnes laite on tukevasti paikallaan.



Kuva 12

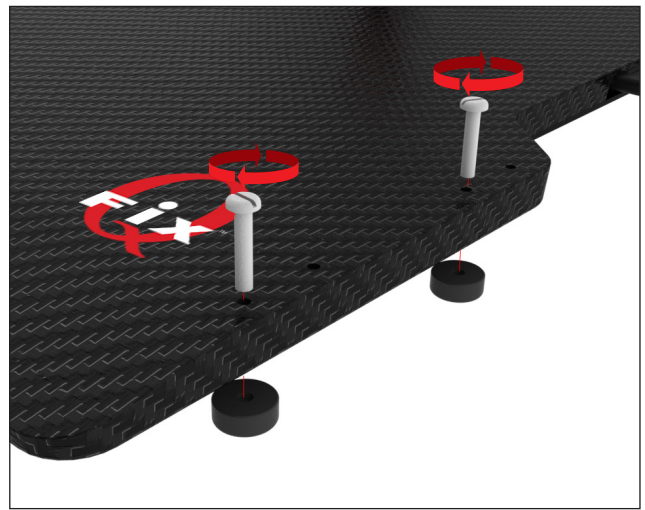

Kuva 13




Kuva 14

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

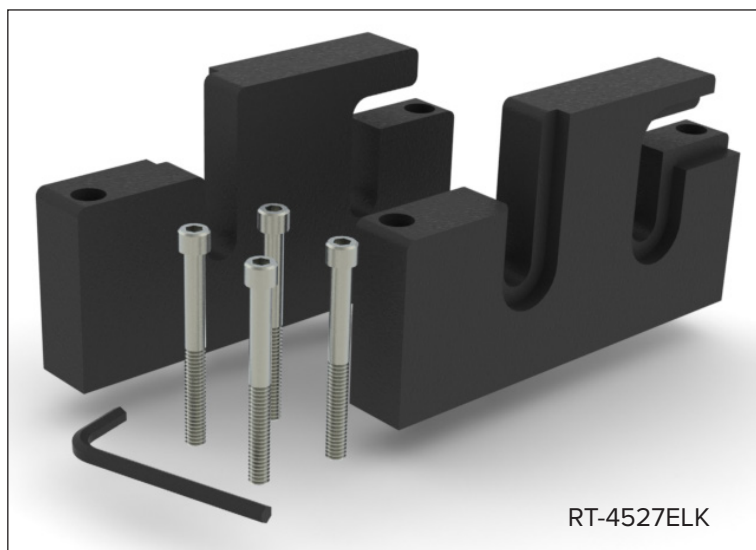

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527ELK

1. Asenna sovitin siten, että sileä pinta on laitteen ulkopuolella ja sovitin on alla olevassa kuvassa näkyvässä kohdassa. Asenna sovitin kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään käyttämällä kahta ¼-20 x 2 ½" -koon kantaruuvia ja mukana toimitettua kuusiokoloavainta (kuva 14).


! HUOMAUTUS ! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -i on asennettu, käytä sovittimelle käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna toinen sovitin samalla tavalla ja pidä sovittimen sileä puoli ulospäin (kuva 15).

3. Asenna laite hoitopöytään kiinnittämällä sovitin lisävarustekiskojen pidikkeeseen.



Kuva 15

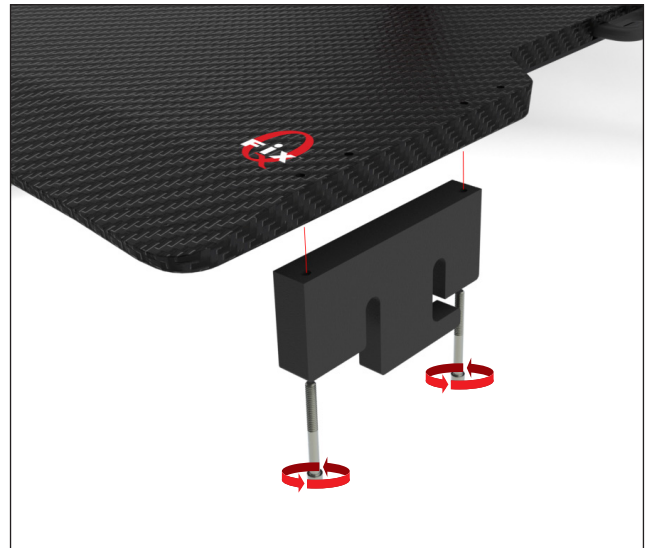

Kuva 16



Kuva 17

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4529M

VARIAN EXACT® -YHTEENSOPIVA TT-SOVITIN



Tarvittavat työkalut: Tasapäinen ruuvitaltta



LAITETTA EI SAA ULOTTA A HOITOPÖYDÄN PÄÄN YLI KÄYTETTÄESSÄ TT-SOVITINTA. JOS LAITE ULOTETAAN HOITOPÖYDÄN PÄÄN YLI, SE VOI PUDOTA HOITOPÖYDÄLTÄ JA VAHINGOITTA A POTILASTA.

SOVITTIMEN KOKOONPANO


RT-4529M

1. Asenna 2 kohdistuslevyä laitteen kummallekin puolelle kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään käyttämällä ¼-20 x 1 ¼" -koon ruuveja (1 ruuvi per levy) (kuva 17).


! HUOMAUTUS ! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -järjestelmä on asennettu, käytä levyille käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna loput 2 kiinnityslevyä vastakkaiselle puolelle kuin kaksi ensimmäistä levyä, vastaaviin reikiin. Käytä ¼-20 x 1 ¼" -koon ruuveja (1 ruuvi per levy) (kuva 18).

3. Asenna laite hoitopöytään kohdistamalla kohdistuslevyt indeksointiloviin. Paina laitetta alaspäin, kunnes se on tukevasti paikallaan.

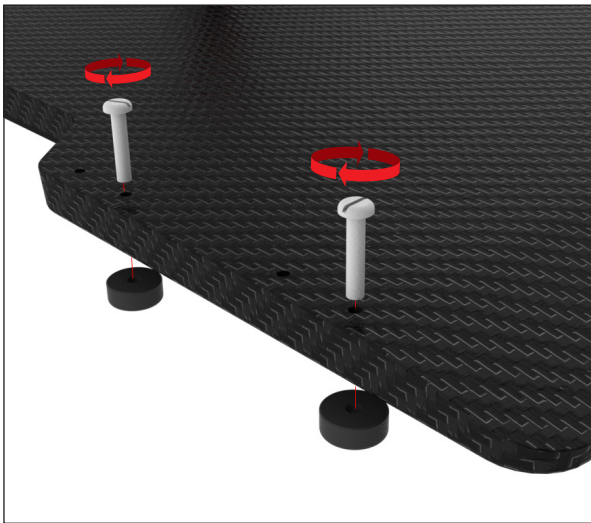

Kuva 18

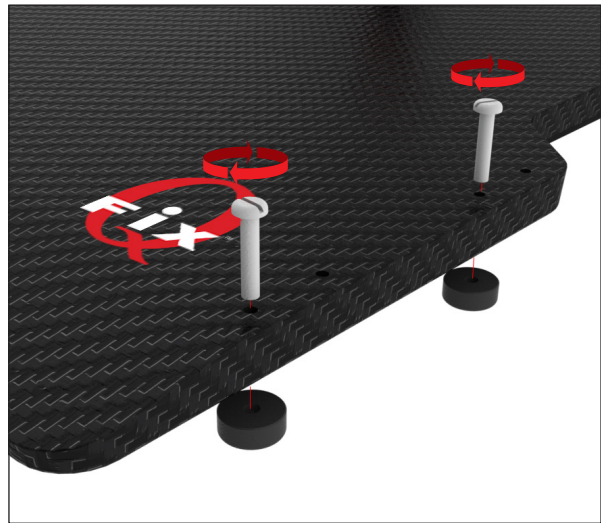

Kuva 19




Kuva 20

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527MTPCT

SIEMENS / MED-TEC PRODIGY™ CT

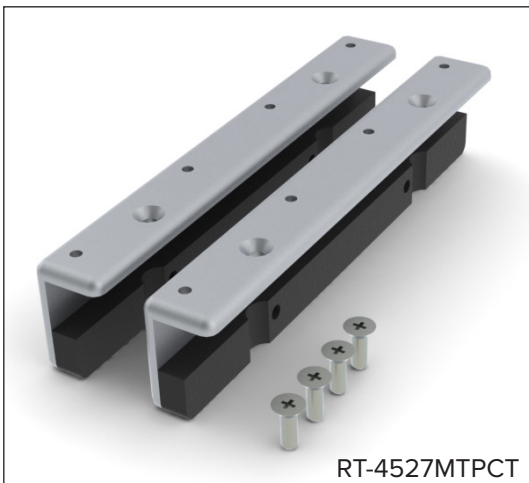

Tarvittavat työkalut: Ristipääruuvitaltta



LAITETTA EI SAA ULOTTAA HOITOPÖYDÄN PÄÄN YLI KÄYTETTÄESSÄ TT-SOVITINTA. JOS LAITE ULOTETAAN HOITOPÖYDÄN PÄÄN YLI, SE VOI PUDOTA HOITOPÖYDÄLTÄ JA VAHINGOITTAÄ POTILASTA.

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527MTPCT

1. Asenna sovitin alla osoitettuun paikkaan kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään kahdella 1/4-20 x 3/4" -koon ruuvilla (kuvat 20 ja 21).


!HUOMAUTUS! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -järjestelmä on asennettu, käytä sovittimelle käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna toinen sovitin samalla tavalla. Pidä sovittimen sileä puoli ulospäin.

3. Asenna laite kohdistamalla sovittimet hoitopöydän sivussa olevaan indeksointiloviin. Paina laitetta alaspäin, kunnes se on tukevasti paikallaan.



Kuva 21

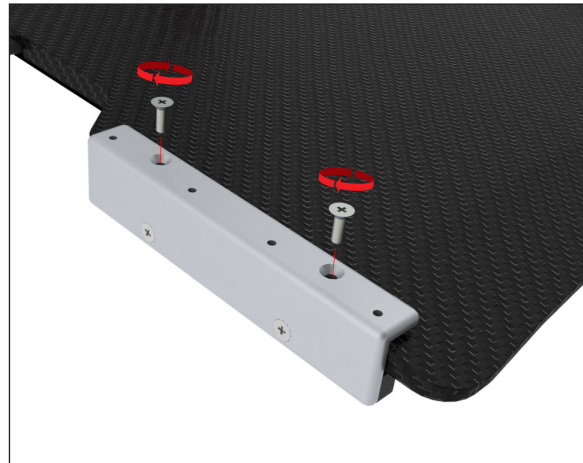

Kuva 22





Kuva 23

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

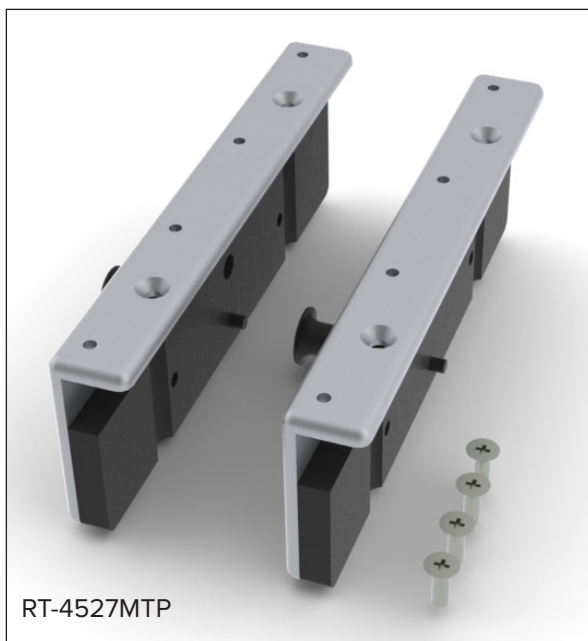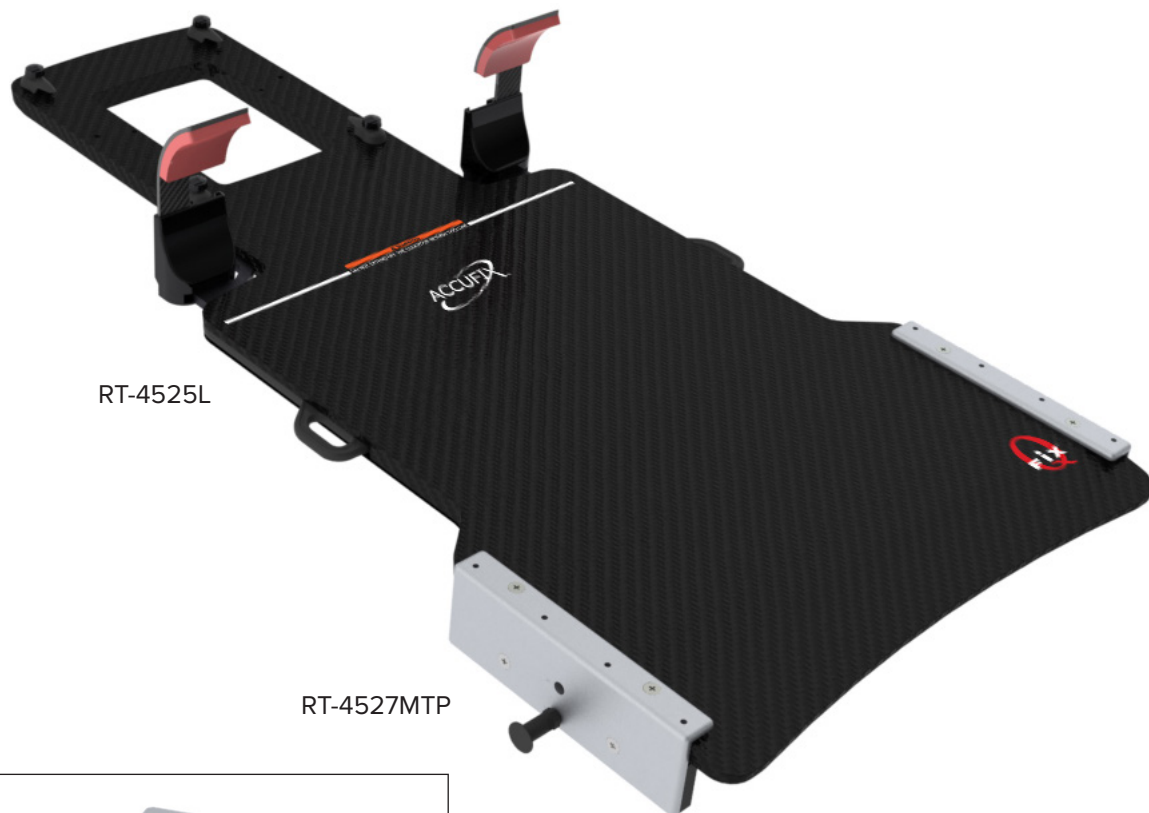

Tarvittavat työkalut: Ristipääruuvitaltta

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527MTP

1. Asenna sovitin alla osoitettuun paikkaan kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään kahdella 1/4-20 x 3/4" -koon ruuvilla (kuvat 24 ja 25).

!HUOMAUTUS! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -järjestelmä on asennettu, käytä sovittimelle käytettävissä olevia reikiä.

2. Toista asennus toiselle sovittimelle.

3. Asenna laite kohdistamalla sovitin hoitopöydän sivussa olevaan indeksintiloihin. Kiinnitä laite hoitopöytään tai irrota se siitä kiertämällä ja vetämällä mäntää.



Kuva 24



Kuva 25




Kuva 26

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

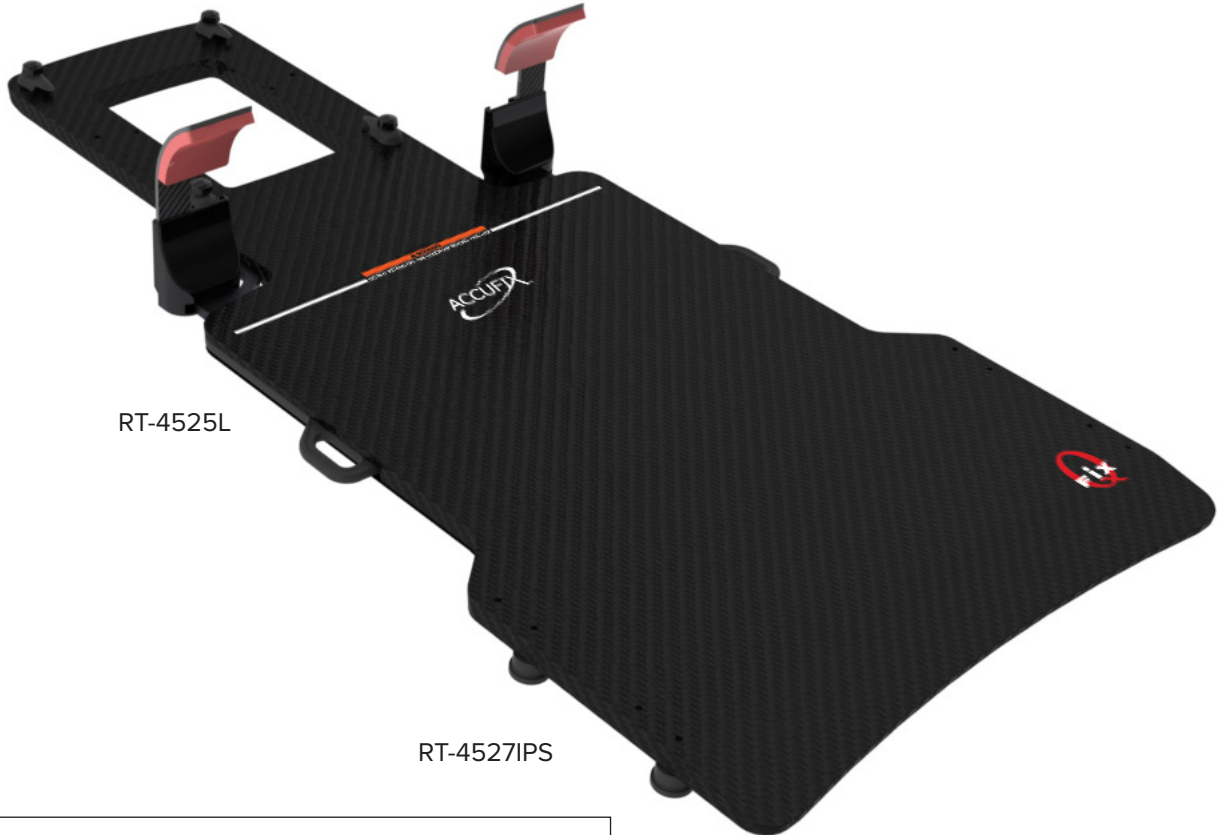

RT-4525L

RT-4527IPS



RT-4527IPS

SOVITTIMEN KOKOONPANO


RT-4527IPS

1. Asenna 2 kohdistuslevyä (reunuksellista) laitteen kummallekin puolelle kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään. Käytä ¼- 20 x 1 ¼" -koon ruuveja (1 ruuvi per levy) (kuva 27).


! HUOMAUTUS ! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -järjestelmä on asennettu, käytä levyille käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna loput 2 kiinnityslevyä (ilman reunusta) vastaaviin reikiin vastakkaiselle puolelle kuin kaksi ensimmäistä levyä. Käytä ¼-20 x 1 ¼" -koon ruuveja (1 ruuvi per levy) (kuva 28).

3. Asenna laite hoitopöytään kohdistamalla levyt indeksointiloviin ja kiinnitä sitten reunukselliset levyt ensin hoitopöytään. Paina alaspäin toiselta puolelta, kunnes laite on tukevasti paikallaan.

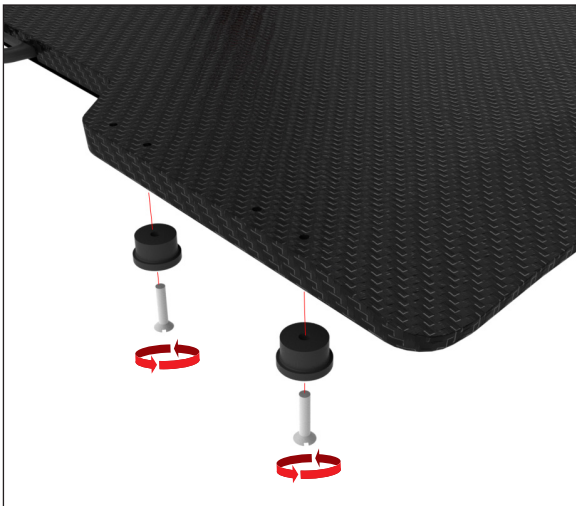

Kuva 27

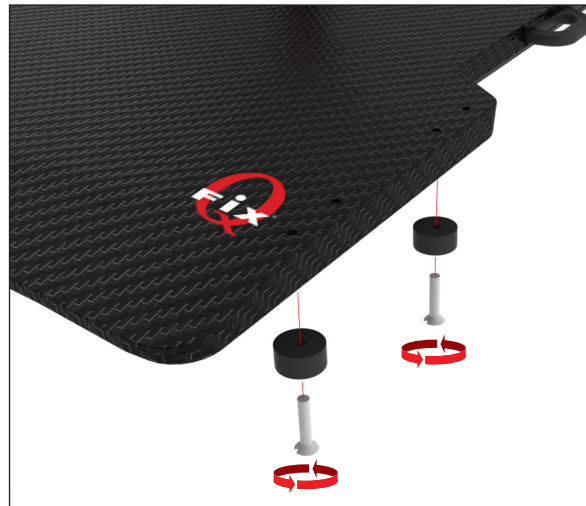

Kuva 28




Kuva 29

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527ZXT


SIEMENS ZXT

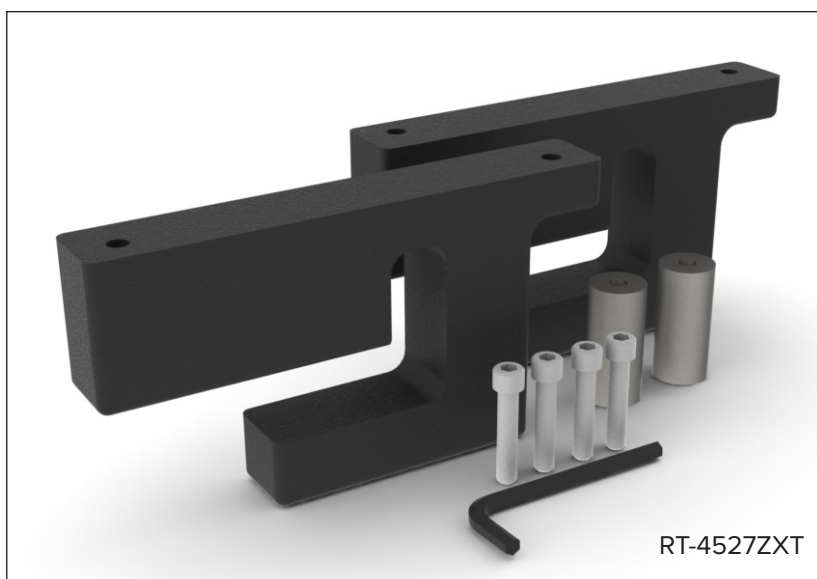

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527ZXT


1. Vaihda ZXT-hoitopöydän neliömäisen pidikkeen tilalle pyöreä pidike. (Kuva 30)
2. Asenna sovitin alla osoitettuun paikkaan kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään. Käytä kahta ¼-20 x 1 ¼" -koon kantaruuvia ja mukana toimitettua kuusiokoloavainta (kuva 31).
- ! HUOMAUTUS ! Sovittimia on oikean- ja vasemmanpuoleisia. Varmista, että asennuksen jälkeen sovitin on samalla tasolla laitteen sivun kanssa. (Kuva 32)**
- ! HUOMAUTUS ! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -järjestelmä on asennettu, käytä levyille käytettävissä olevia reikiä.**
3. Asenna toinen sovitin (kuva 33).
4. Asenna laite hoitopöytään kiinnittämällä sovitin lisävarustekiskojen pidikkeeseen (kuva 34).

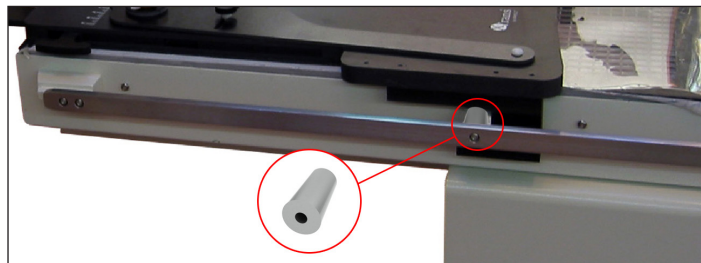


Kuva 30



Kuva 31

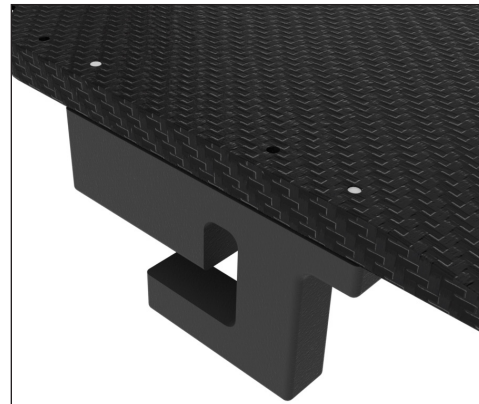

Kuva 32

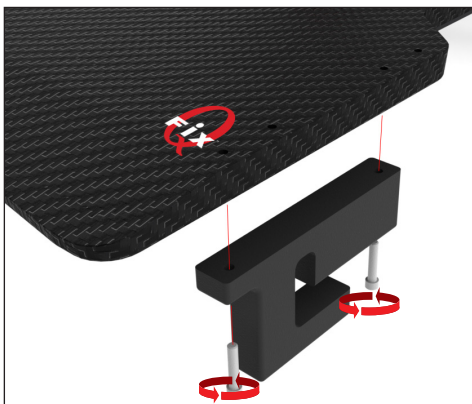

Kuva 33





Kuva 34

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527SKD

SIEMENS KD

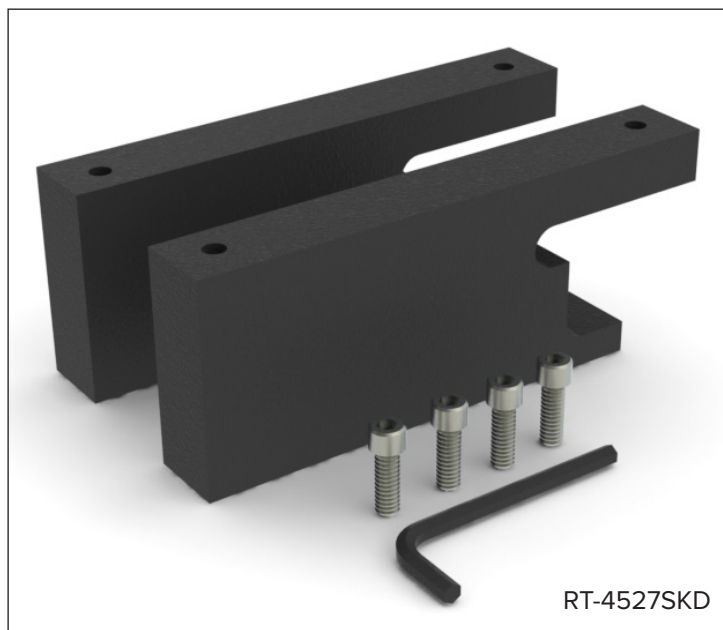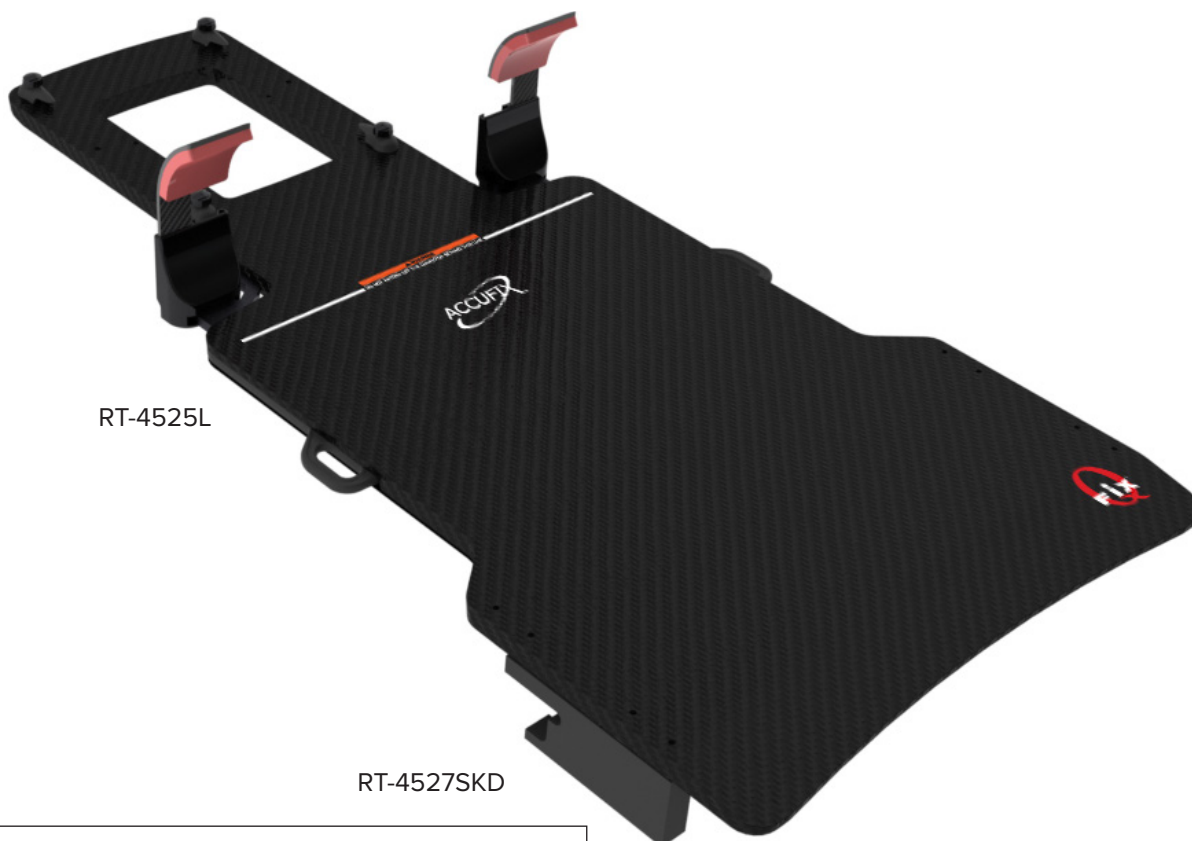

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527SKD


1. Asenna sovitin alla osoitettuun kohtaan kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään käyttämällä kahta 1/4-20 x 3/4" -koon kantaruuvia ja mukana toimitettua kuusiokoloavainta (kuva 35).

! HUOMAUTUS ! Sovittimia on oikean- ja vasemmanpuoleisia. Varmista, että asennuksen jälkeen sovitin on samalla tasolla laitteen sivun kanssa. (Kuva 36)


! HUOMAUTUS ! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -järjestelmä on asennettu, käytä levyille käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna toinen sovitin (kuva 37).

3. Asenna laite hoitopöytään kiinnittämällä sovitin lisävarustekiskojen pidikkeeseen.

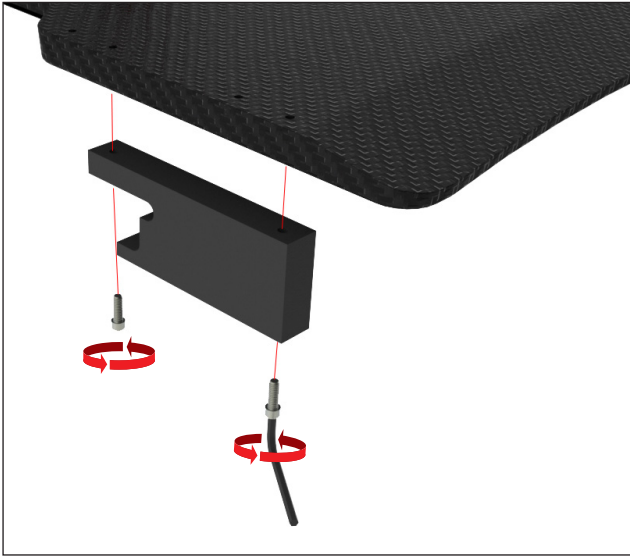

Kuva 35

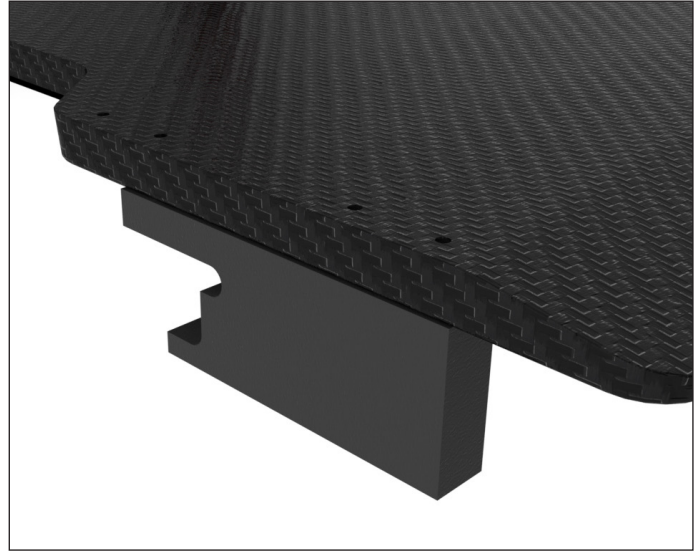

Kuva 36



Kuva 37



Kuva 38

SOVITTIMEN KOKOONPANO


RT-4527ETRJ

VARIAN ETR



RT-4525L

RT-4527ETRJ

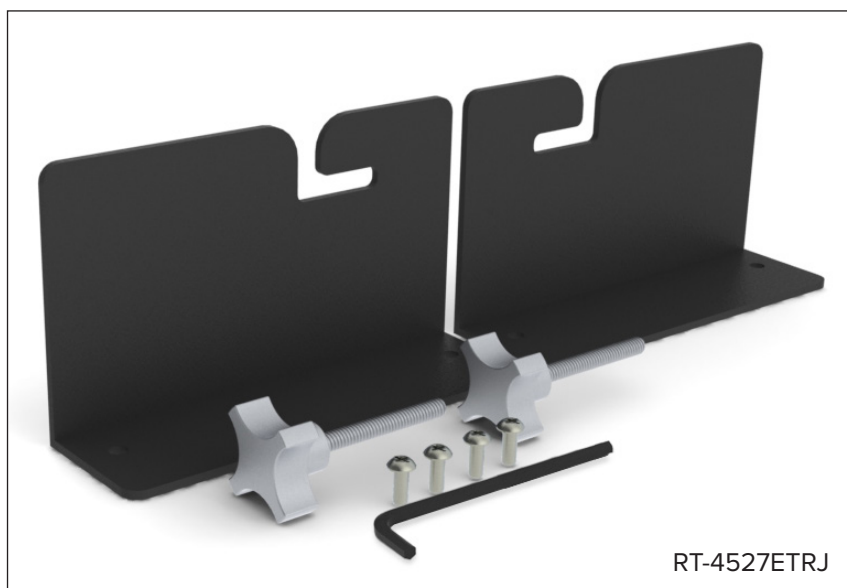

RT-4527ETRJ

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527ETRJ


1. Irrota kolmas kuusiokoloruuvi ETR-hoitopöydän yläpäästä mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella. (Kuva 39)
2. Toista sama tutkimuspöydän vastakkaisella puolella.
3. Vaihda kuusiokoloruuvi mukana toimitettuun nuppiin. Nupin on pysyttävä koko ajan osana hoitopöytää. Älä kiristä nuppia kokonaan. Jätä noin 0,5 cm liikevaraa (kuva 40).
4. Toista sama tutkimuspöydän vastakkaisella puolella.
5. Asenna sovitin alla osoitettuun kohtaan kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään kahdella ¼-20 x ½" -koon ruuvilla (kuva 41).
- ! HUOMAUTUS ! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -järjestelmä on asennettu, käytä levyille käytettävissä olevia reikiä.**
6. Asenna toinen sovitin (kuva 42).
7. Asenna laite hoitopöytään kiinnittämällä sovitin nupin varteen. Kiristä nuppi. (Kuva 43)




Kuva 39




Kuva 40

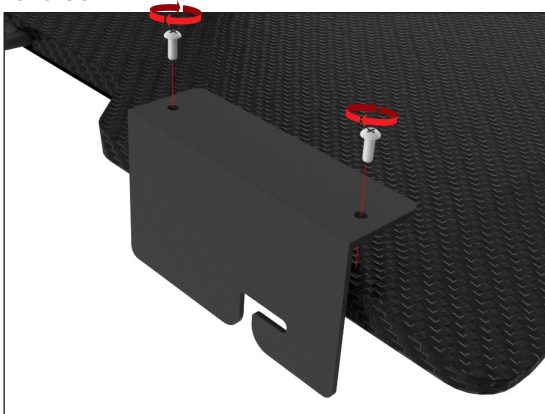

Kuva 41

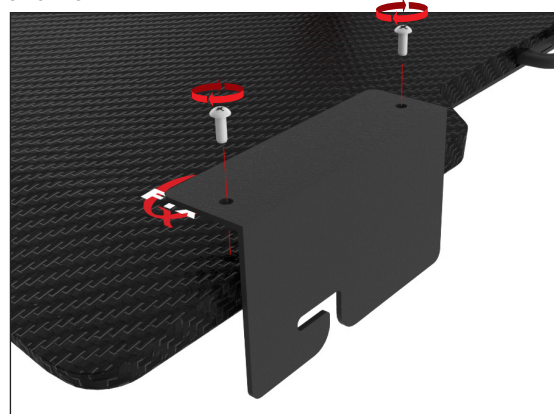

Kuva 42

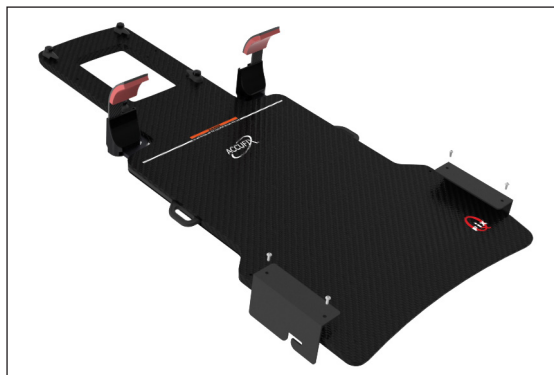


Kuva 43

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527EXA475

NARROW EXACT® -TYYLINEN 500 MM LEVEÄ INDEKSOITU TT-ALUSTA

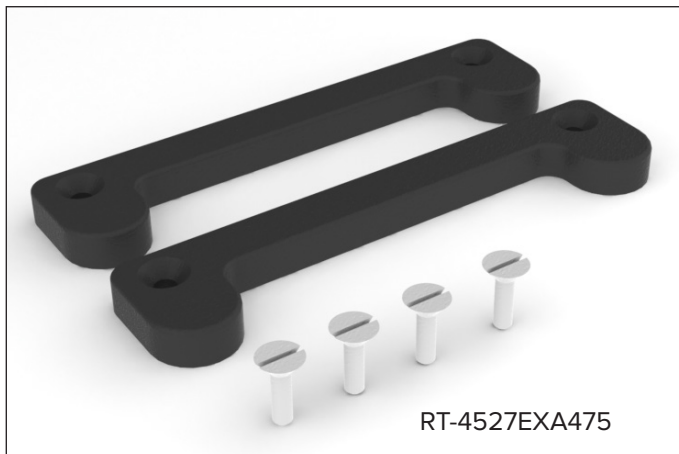

Tarvittavat työkalut: Tasapäinen ruuvitaltta



LAITETTA EI SAA ULOTTAA HOITOPÖYDÄN PÄÄN YLI KÄYTETTÄESSÄ TT-SOVITINTA. JOS LAITE ULOTETAAN HOITOPÖYDÄN PÄÄN YLI, SE VOI PUDOTA HOITOPÖYDÄLTÄ JA VAHINGOITTAÄ POTILASTA.

SOVITTIMEN KOKOONPANO


RT-4527EXA475

1. Asenna sovitin alla osoitettuun kohtaan kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään kahdella ¼-20 x ¾" -koon ruuvilla (kuva 44).


! HUOMAUTUS ! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -järjestelmä on asennettu, käytä levyille käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna toinen sovitin (kuva 45).

3. Asenna laite hoitopöytään kohdistamalla sovitin indeksintiloihin. Paina laitetta alaspäin, kunnes se on tukevasti paikallaan.

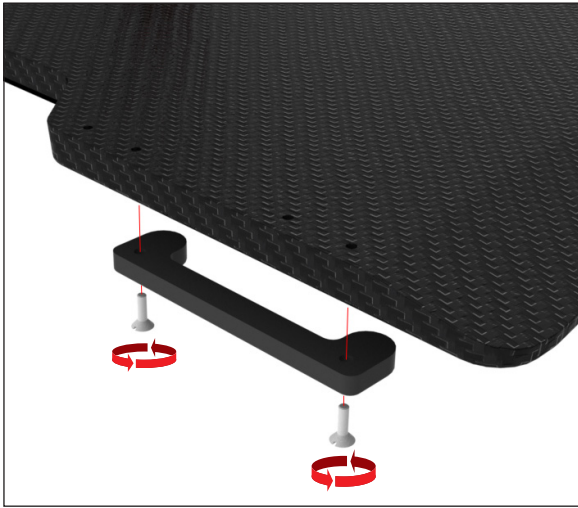

Kuva 44

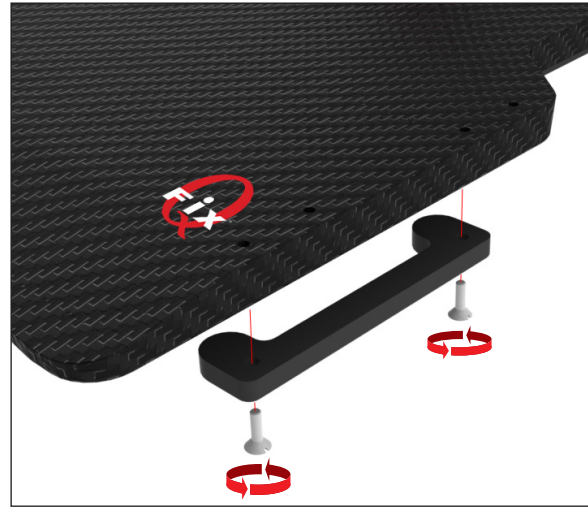

Kuva 45




Kuva 46

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527PETCT

PHILIPS GEMINI™ JA GE DISCOVERY™ LS, 480 MM LEVEÄT PET-/TT-ALUSTAT

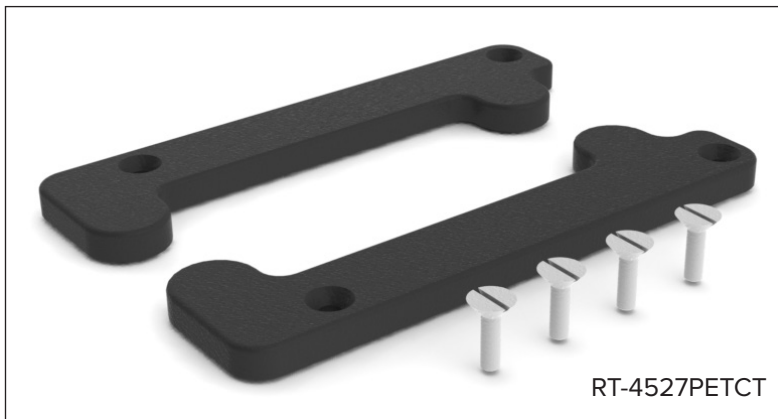

Tarvittavat työkalut: Tasapäinen ruuvitaltta



LAITETTA EI SAA ULOTTAA HOITOPÖYDÄN PÄÄN YLI KÄYTETTÄESSÄ TT-SOVITINTA. JOS LAITE ULOTETAAN HOITOPÖYDÄN PÄÄN YLI, SE VOI PUDOTA HOITOPÖYDÄLTÄ JA VAHINGOITAA POTILASTA.

SOVITTIMEN KOKOONPANO

RT-4527PETCT

1. Asenna sovitin alla osoitettuun kohtaan kahteen 140 mm:n (5,5") päässä toisistaan olevaan reikään kahdella ¼-20 x ¾" -koon ruuvilla (kuva 47).


! HUOMAUTUS ! Rei'illä ei ole merkitystä, mutta jos Hand Grip Array -järjestelmä on asennettu, käytä levyille käytettävissä olevia reikiä.

2. Asenna toinen sovitin (kuva 48).

3. Asenna laite hoitopöytään kohdistamalla sovittimet indeksointiloviin. Paina laitetta alaspäin, kunnes se on tukevasti paikallaan.



Kuva 47

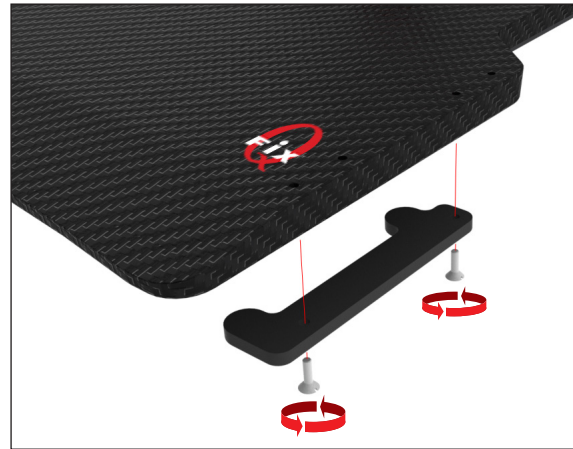

Kuva 48



Kuva 49

KIILAN ASENUS

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (kuva 50)

1. Poista 2 ruuvia, jotka kiinnittävät sovittimen Hand Grip Array -järjestelmään.
2. Aseta kiila sovittimen ja Hand Grip Array -järjestelmän väliin ja aseta ruuviaukot kiilan aukkojen kohdalle.
3. Aseta ruuvit takaisin paikalleen ja kiristä.
4. Jatka asennusohjeiden mukaisesti.

RT-4527LMI3 (kuva 51)

1. Poista 2 ruuvia, jotka kiinnittävät sovittimen Hand Grip Array -järjestelmään.
2. Aseta kiila sovittimen ja Hand Grip Array -järjestelmän väliin ja aseta ruuviaukot kiilan aukkojen kohdalle.
3. Aseta ruuvit takaisin paikalleen ja kiristä.
4. Jatka asennusohjeiden mukaisesti.



Kuva 50



Kuva 51



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com