
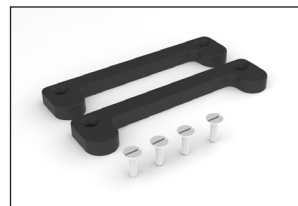
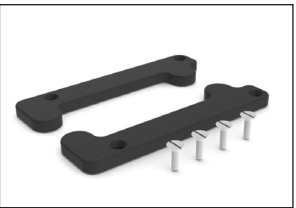
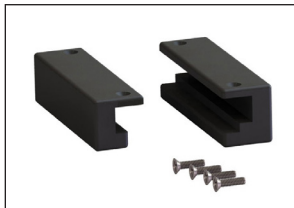
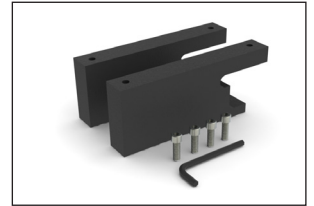
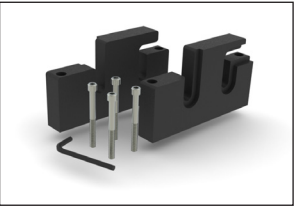
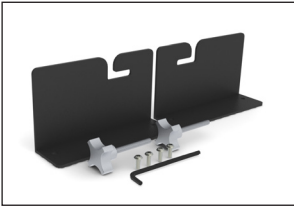
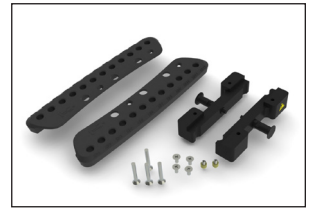
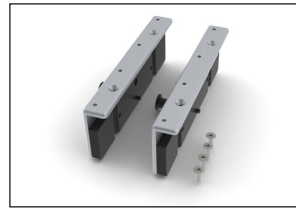
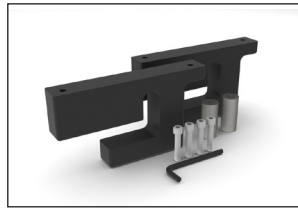


PANDUAN PEMASANGAN & BUKU PANDUAN PENGGUNA

Adaptor Pengindeksan

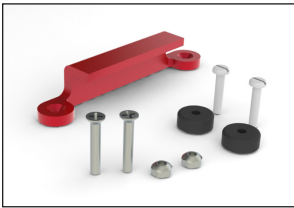

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass, dan Hand Grip Array adalah merek dagang dari Qfix.

Exact® dan ETR® adalah merek dagang terdaftar dari Varian Medical Systems.

Medical Intelligence I-Beam adalah merek dagang dan Precise® adalah merek dagang terdaftar dari Elekta AB.

ZXT dan TXT adalah merek dagang dari Siemens AG.

Med-Tec Prodigy dan IPPS adalah merek dagang dari Civco Medical Solutions.

Gemini adalah merek dagang dari Philips Medical Systems.

Discovery adalah merek dagang dari GE Medical.

TINDAKAN PENCEGAHAN UMUM

PERNYATAAN PERINGATAN

Lihat CQmedical.com untuk daftar simbol dan definisinya.

! PERINGATAN ! PERALATAN INI TIDAK BOLEH DIMODIFIKASI. JIKA BAGIAN APA PUN DARI PERANGKAT INI MENGALAMI BEBAN BERLEBIHAN, TERLIHAT RUSAK, ATAU TIDAK BERFUNGSI DENGAN BENAR, SEGERA HENTIKAN PENGGUNAAN DAN HUBUNGI CQ MEDICAL DI +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ATAU SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

Adaptor ini dirancang untuk berfungsi dengan Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, Papan CURVE™, dan Rangka Kepala BoS™.

PERINGATAN PENGGUNAAN UMUM


Perangkat TIDAK boleh ditempatkan dalam posisi kantilever melebihi ujung bagian atas dipan ketika menggunakan adaptor CT berikut:

- RT-4527LTOMO (hlm. 7)
- RT-4529M (hlm. 20)
- RT-4527MTPCT (hlm. 22)
- RT-4527EXA475 (hlm. 34)
- RT-4527PETCT (hlm. 36)

Menempatkan perangkat dalam posisi kantilever melebihi ujung bagian atas dipan dapat menyebabkan perangkat terjatuh dari bagian atas dipan, sehingga mencederai pasien.

PENYIAPAN ADAPTOR RT-4527LMI3

ADAPTOR ELEKTA/MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ DAN
TOMOTERAPI

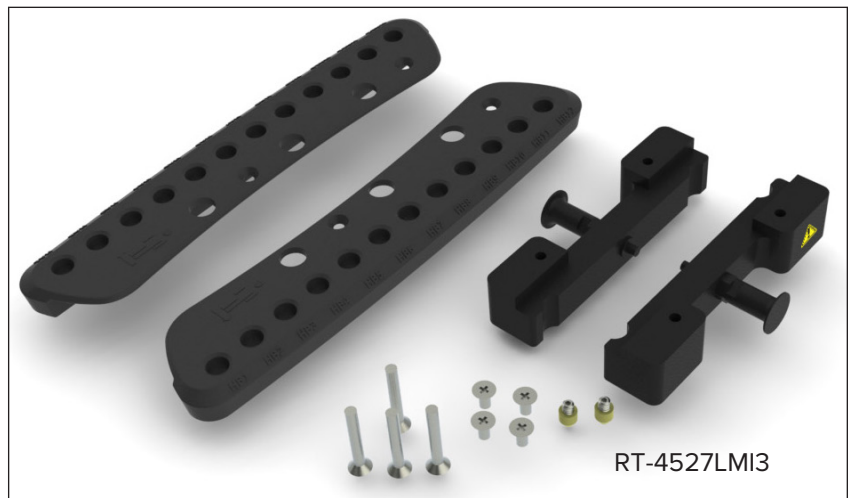

Alat yang Dibutuhkan: Obeng Plus



! PERINGATAN ! BERHATI-HATILAH KARENA TITIK JEPIT DAPAT TERJADI DI ANTARA ADAPTOR PERANGKAT DAN BAGIAN ATAS DIPAN KETIKA TEKanan DIBERIKAN PADA POSISI SUPERIOR TERHADAP GARIS PERINGATAN.

4

PANDUAN PEMASANGAN DAN BUKU PANDUAN PENGGUNA – 2002950_IFU, Indexing Adapters_ID

CQ Medical | +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 | www.CQmedical.com

PENYIAPAN ADAPTOR RT-4527LMI3


! CATATAN ! Jika memasang pada perangkat dengan ketebalan 28 mm, seperti Encompass™, lihat halaman 38 untuk pemasangan shim sebelum melanjutkan penyiapan.

1. Pasang adaptor ke masing-masing Hand Grip Array menggunakan (masing-masing) 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 1 1/2" (Gbr. 1).
2. Pasang adaptor pengaturan lokasi berbentuk kerucut kuning langsung ke bagian bawah perangkat (Pasang satu di setiap sisi). (Gbr. 2 dan 2a)
3. Pasang Hand Grip Array pada perangkat, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan (masing-masing) 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 1 1/2". (Gbr. 3)


! CATATAN ! Titik Jepit dapat terjadi di antara adaptor perangkat dan bagian atas dipan ketika tekanan diberikan pada posisi superior terhadap garis peringatan.

! CATATAN ! Untuk informasi selengkapnya tentang memasang Hand Grip Array, lihat Panduan Produk dan Buku Panduan Pengguna Hand Grip Array.

4. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyejajarkan kerucut kuning dengan lubang pengindeksan pada permukaan atas dari bagian atas dipan. Putar dan tarik palang pengunci untuk memasang/melepaskan perangkat di bagian atas dipan.

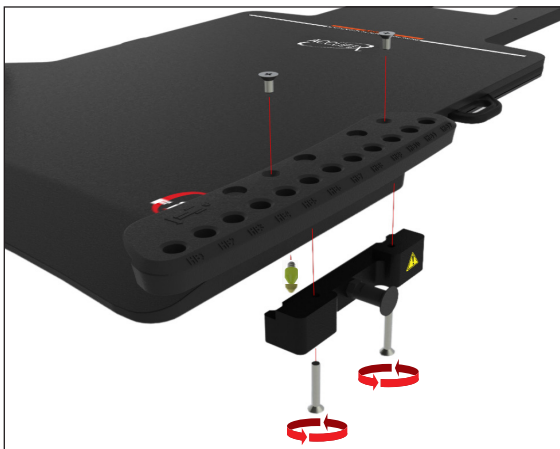


Gbr. 1

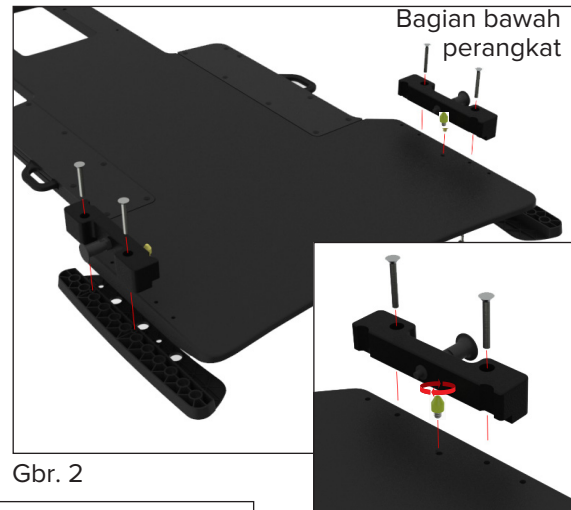

Gbr. 2

Gbr. 2a

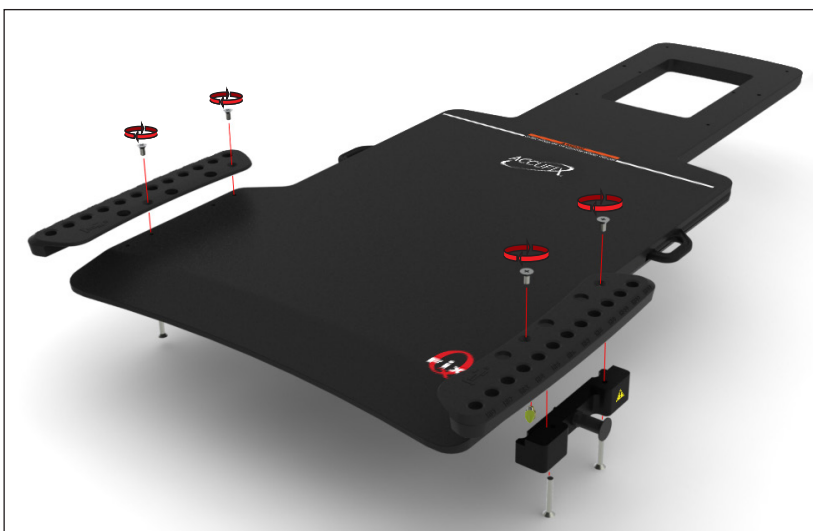

Gbr. 3

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527LTOMO



! PERINGATAN ! PERANGKAT INI *TIDAK* BOLEH DITEMPATKAN DALAM POSISI KANTILEVER MELEBIHI UJUNG BAGIAN ATAS DIPAN KETIKA MENGGUNAKAN ADAPTOR INI; TINDAKAN TERSEBUT DAPAT MENYEBABKAN PERANGKAT TERJATUH DARI BAGIAN ATAS DIPAN, SEHINGGA MENCEDERAI PASIEN.

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527LTOMO

1. Pasang adaptor pengaturan lokasi berbentuk kerucut kuning langsung ke bagian bawah perangkat (Pasang satu di setiap sisi) (Gbr. 4 dan 5).
2. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyejajarkan kerucut kuning dengan lubang pengindeksan pada permukaan atas dari bagian atas dipan.



Gbr. 4




Gbr. 5

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527MI

ADAPTOR ELEKTA/MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ DAN TOMOTERAPI

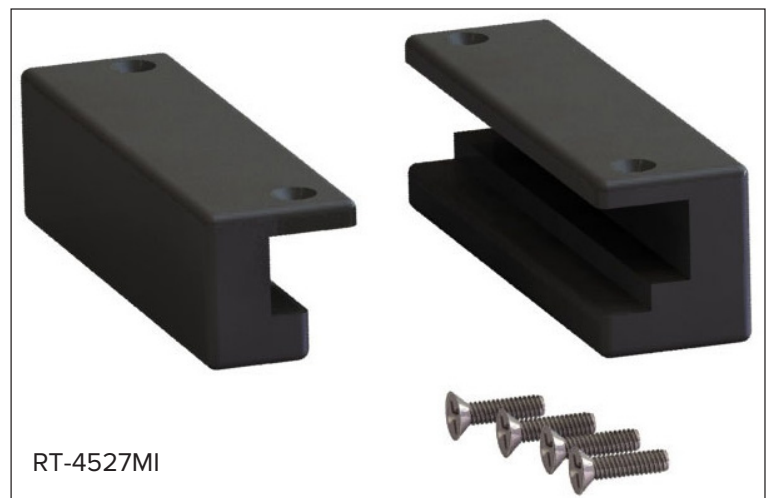

Alat yang Dibutuhkan: Obeng Plus


PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527MI


1. Pasang salah satu adaptor ke salah satu sisi perangkat pada posisi yang ditunjukkan di bawah ini, dengan menggunakan (masing-masing) 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 1/2". (Gbr. 6)

! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk adaptor.

2. Ulangi pemasangan untuk adaptor di sisi berlawanan (Gbr. 7).
3. Tempatkan bilah pengaturan lokasi 2 pin di posisi yang diinginkan (setelah dipasang, pin bilah pengaturan lokasi akan sejajar dengan lubang di bagian bawah perangkat) (Gbr. 6, 7, dan 8).
4. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyambungkan adaptor yang lebih besar ke bagian atas dipan terlebih dahulu, lalu adaptor yang lebih kecil, dan pasang perangkat menggunakan bilah pengaturan lokasi 2 pin.

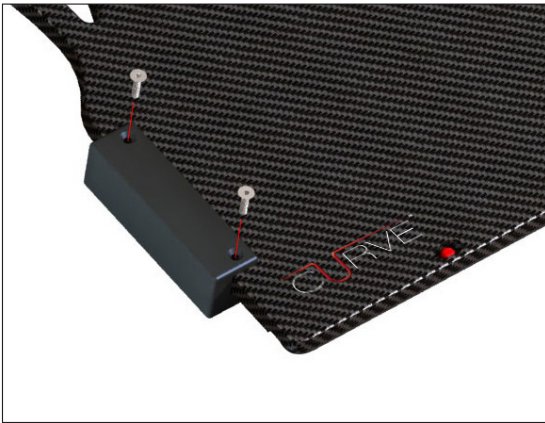

Gbr. 6

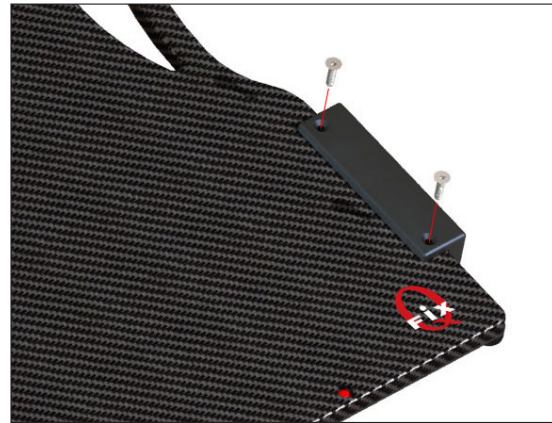

Gbr. 7




Gbr. 8

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527EXAG

ADAPTOR VARIAN EXACT®

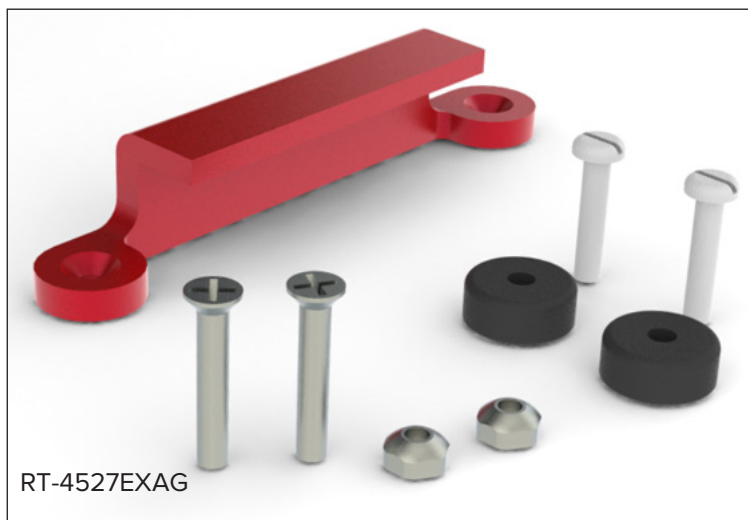

Alat yang Dibutuhkan: Obeng Plus dan Obeng Minus

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527EXAG


1. Pasang adaptor merah ke perangkat, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 1 3/8". Lalu pasang 2 mur pengaman ukuran 1/4-20 pada sekrup dari sisi atas perangkat (Gbr. 9).

! CATATAN ! Adaptor dapat dipasang di sisi kanan atau kiri perangkat. Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk adaptor.

2. Pasang 2 Cakram Pengaturan Lokasi di sisi yang berlawanan dari adaptor pengaturan lokasi, di lubang yang sesuai, dengan menggunakan sekrup ukuran 1/4-20 x 1 1/4" (masing-masing 1 buah) (Gbr. 10).
3. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyambungkan adaptor merah pada satu sisi, lalu dorong sisi dengan cakram pengaturan lokasi ke bawah, ke dalam takik pengindeksan, hingga kencang.



Gbr. 9

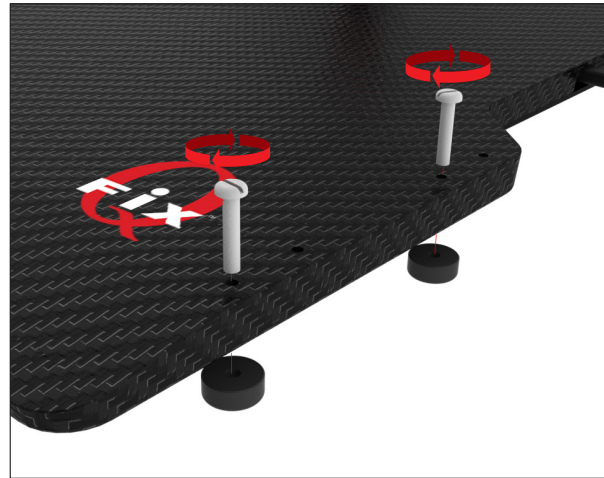

Gbr. 10



Gbr. 11

PENYIAPAN ADAPTOR RT-4527QFIX

ADAPTOR QFIX™ KVUE™ DAN QUANTUM™



Alat yang Dibutuhkan: Obeng Plus dan Obeng Minus

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527QFIX


1. Pasang adaptor ke perangkat, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 3/4". Pastikan bagian adaptor yang menonjol menghadap ke dalam, sehingga dapat mengunci ke bibir perangkat Qfix (Gbr. 12).

! CATATAN ! Adaptor dapat dipasang di sisi kanan atau kiri perangkat. Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk adaptor.

2. Pasang 2 cakram pengaturan lokasi di sisi yang berlawanan dari adaptor pengaturan lokasi, di lubang yang sesuai, dengan menggunakan sekrup ukuran 1/4-20 x 1 1/4" (masing-masing 1 buah) (Gbr. 13).
3. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyambungkan adaptor pada satu sisi bagian atas dipan, lalu dorong sisi dengan cakram pengaturan lokasi ke bawah, ke dalam takik pengindeksan, hingga kencang.



Gbr. 12

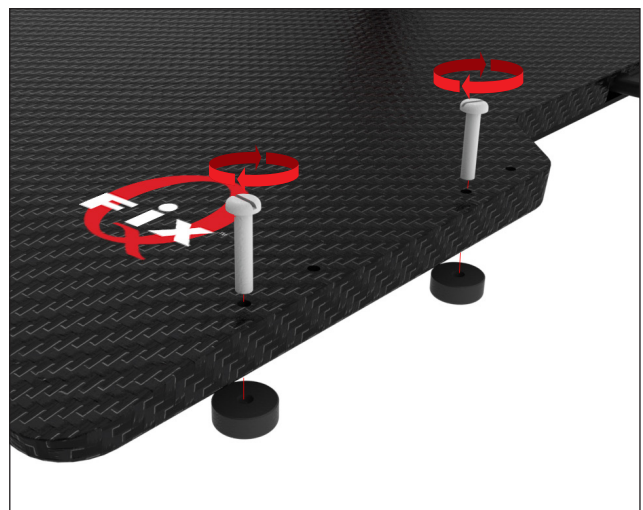

Gbr. 13




Gbr. 14

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

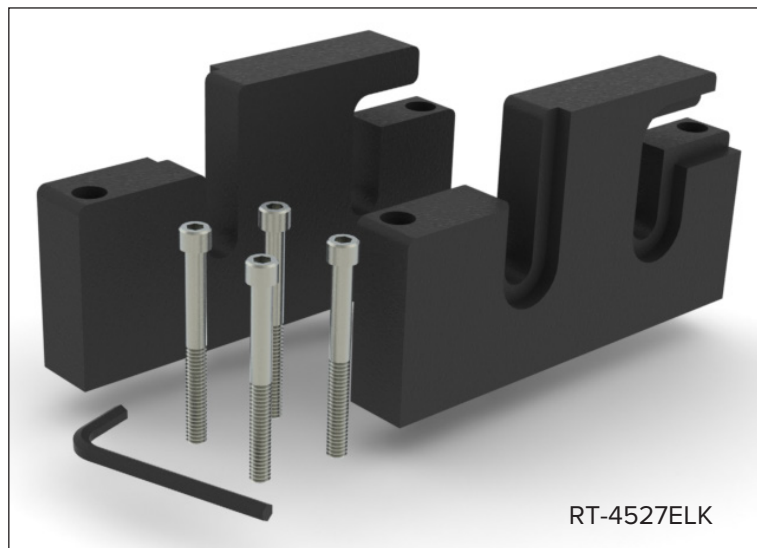


PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527ELK


1. Pasang adaptor agar permukaan yang mulus (tanpa lekukan) berada di bagian luar perangkat dan adaptor berada pada posisi yang ditunjukkan di bawah ini, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup penutup ukuran 1/4-20 x 2 1/2" dengan Kunci L yang disediakan (Gbr. 14).

! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk adaptor.

2. Ulangi pemasangan untuk adaptor di sisi berlawanan, dengan sisi adaptor yang mulus (tanpa lekukan) menghadap ke luar (Gbr. 15).
3. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyambungkan adaptor ke tautan pengatur jarak di rel aksesori.

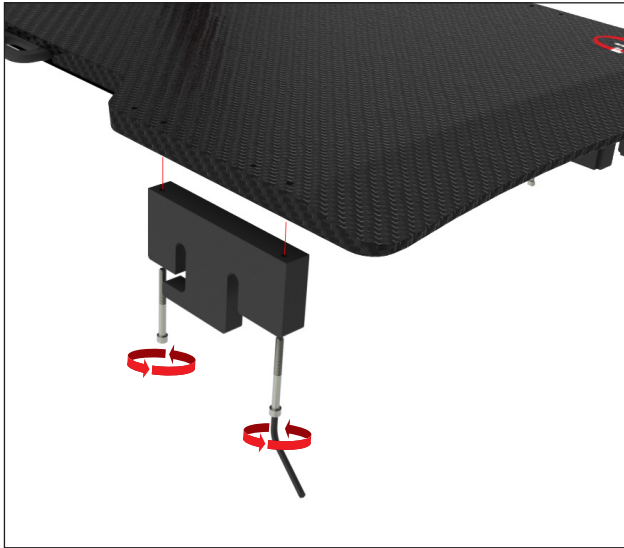

Gbr. 15

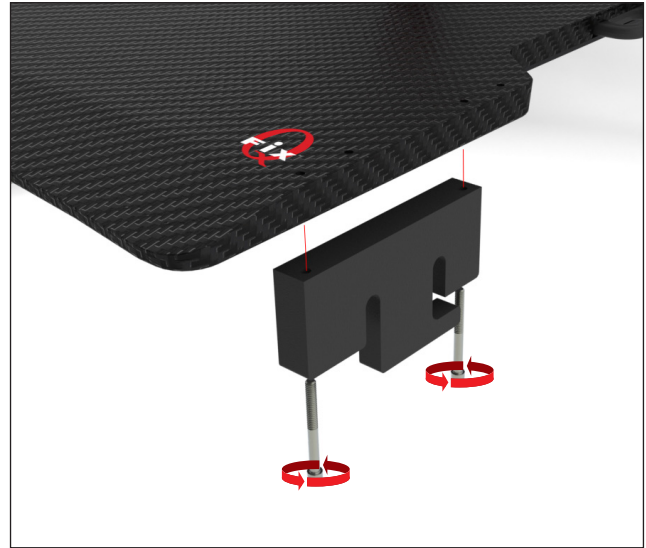

Gbr. 16



Gbr. 17

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4529M

CT KOMPATIBEL VARIAN EXACT®



Alat yang Dibutuhkan: Obeng Minus



PERANGKAT *TIDAK* BOLEH DITEMPATKAN DALAM POSISI KANTILEVER MELEBIHI UJUNG BAGIAN ATAS DIPAN KETIKA MENGGUNAKAN ADAPTOR CT INI. MENEMPATKAN PERANGKAT DALAM POSISI KANTILEVER MELEBIHI UJUNG BAGIAN ATAS DIPAN DAPAT MENYEBABKAN PERANGKAT TERJATUH DARI BAGIAN ATAS DIPAN, SEHINGGA MENCEDERAI PASIEN.


PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4529M


1. Pasang 2 cakram pengaturan lokasi di salah satu sisi perangkat, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan sekrup ukuran 1/4-20 x 1 1/4" (masing-masing 1 buah) (Gbr. 17).

! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk cakram.

2. Pasang 2 cakram pengaturan lokasi yang tersisa di sisi yang berlawanan dengan dua cakram pertama, di lubang yang sesuai, dengan menggunakan sekrup ukuran 1/4-20 x 1 1/4" (masing-masing 1 buah) (Gbr. 18).
3. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyejajarkan cakram pengaturan lokasi ke takik pengindeksan. Tekan perangkat ke bawah hingga terpasang dengan kencang.

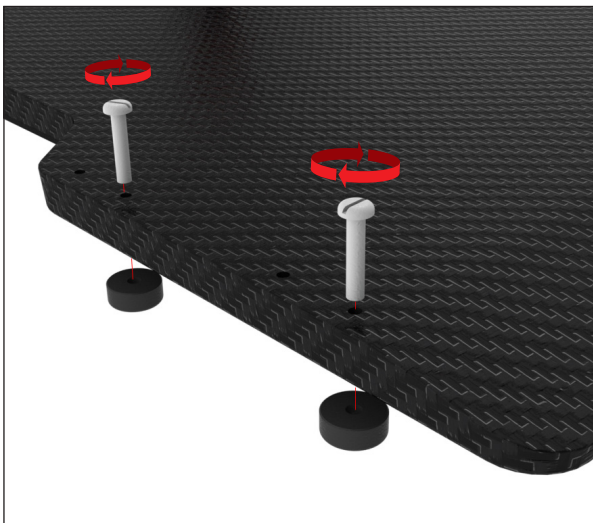

Gbr. 18

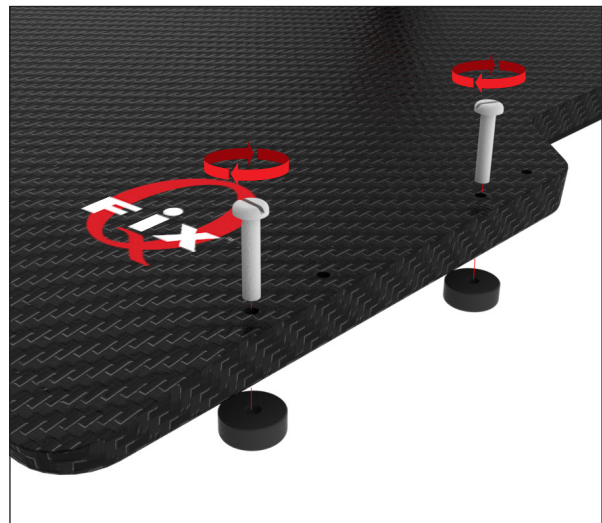


Gbr. 19



Gbr. 20

PENYIAPAN ADAPTOR RT-4527MTPCT

CT SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

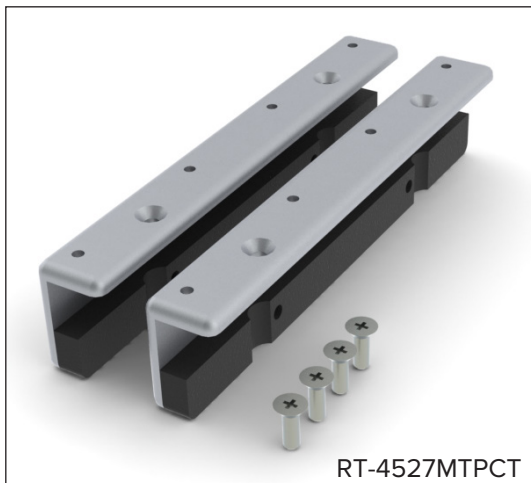

Alat yang Dibutuhkan: Obeng Plus



PERANGKAT *TIDAK* BOLEH DITEMPATKAN DALAM POSISI KANTILEVER MELEBIHI UJUNG BAGIAN ATAS DIPAN KETIKA MENGGUNAKAN ADAPTOR CT INI. MENEMPATKAN PERANGKAT DALAM POSISI KANTILEVER MELEBIHI UJUNG BAGIAN ATAS DIPAN DAPAT MENYEBABKAN PERANGKAT TERJATUH DARI BAGIAN ATAS DIPAN, SEHINGGA MENCEDERAI PASIEN.

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527MTPCT

1. Pasang adaptor pada posisi yang ditunjukkan di bawah ini, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 3/4" (Gbr. 20 dan 21).


! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk adaptor.

2. Ulangi pemasangan untuk adaptor di sisi berlawanan, dengan sisi adaptor yang mulus menghadap ke luar.

3. Pasang perangkat dengan menyejajarkan adaptor dengan pengindeksan di sepanjang sisi bagian atas dipan. Tekan perangkat ke bawah hingga terpasang dengan kencang.



Gbr. 21

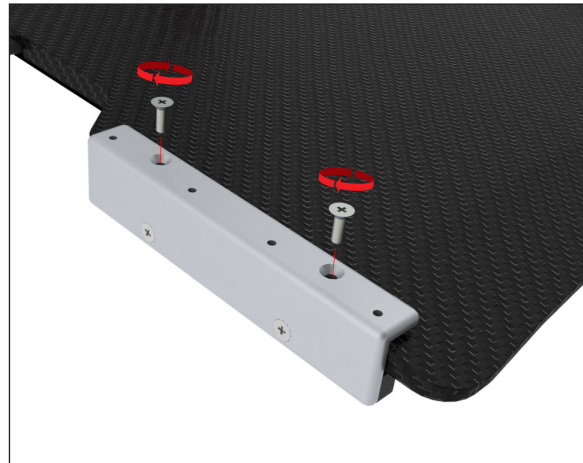

Gbr. 22




Gbr. 23

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

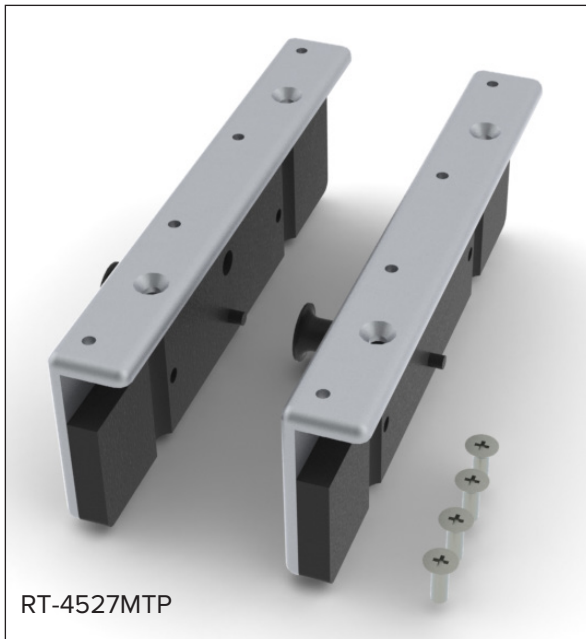

Alat yang Dibutuhkan: Obeng Plus

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527MTP

1. Pasang adaptor pada posisi yang ditunjukkan di bawah ini, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 3/4" (Gbr. 24 dan 25).

! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk adaptor.

2. Ulangi pemasangan untuk adaptor di sisi berlawanan.

3. Pasang perangkat dengan menyelaraskan adaptor dengan pengindeksan di sepanjang sisi bagian atas dipan. Putar dan tarik Palang Pengunci untuk memasang/melepaskan perangkat di bagian atas dipan.



Gbr. 24



Gbr. 25




Gbr. 26

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

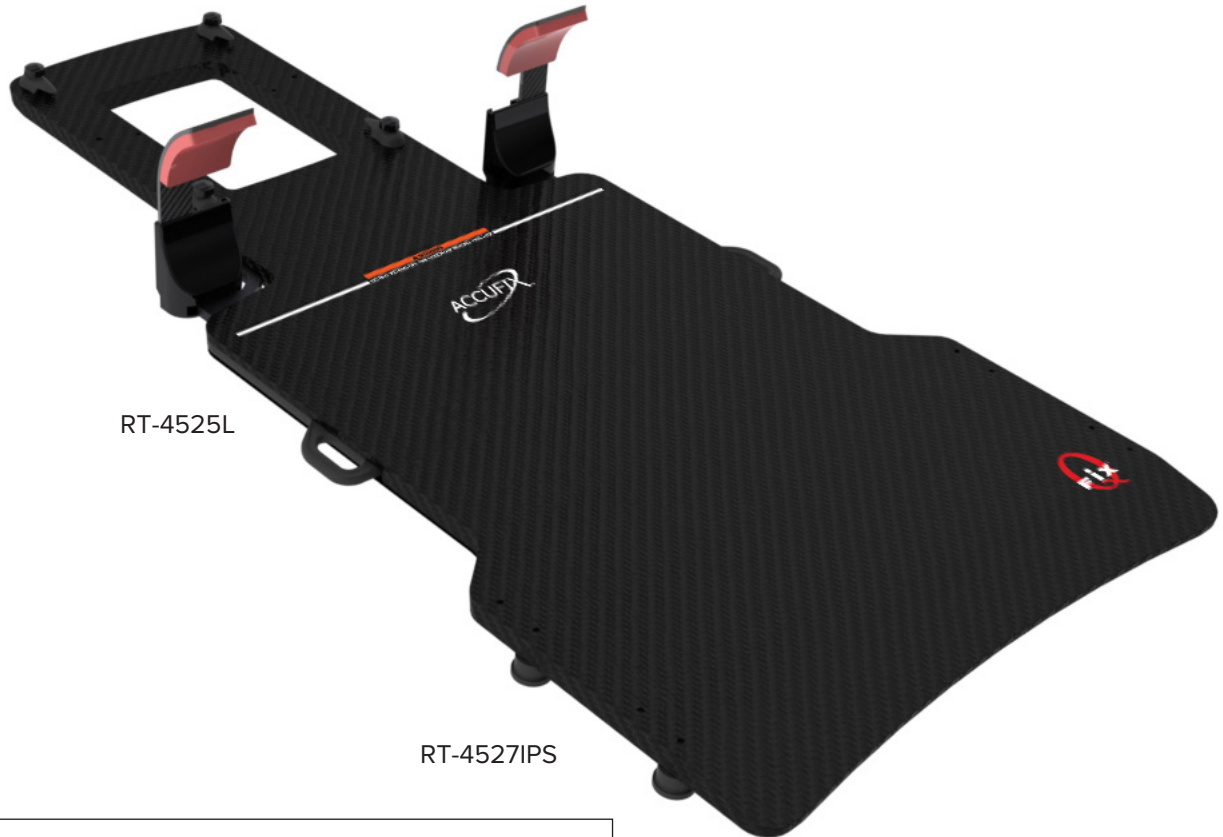

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527IPS

1. Pasang 2 cakram pengaturan lokasi (dengan bibir) di salah satu sisi perangkat, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan sekrup ukuran 1/4-20 x 1 1/4" (masing-masing 1 buah) (Gbr. 27).

! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk cakram.

2. Pasang 2 cakram pengaturan lokasi yang tersisa (tanpa bibir) di sisi yang berlawanan dengan dua cakram pertama, di lubang yang sesuai, dengan menggunakan sekrup ukuran 1/4-20 x 1 1/4" (masing-masing 1 buah) (Gbr. 28).
3. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyejajarkan cakram dengan takik pengindeksan, lalu sambungkan cakram yang memiliki bibir pada bagian atas dipan terlebih dahulu. Tekan sisi lainnya ke bawah hingga perangkat terpasang dengan kencang.



Gbr. 27



Gbr. 28




Gbr. 29

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT

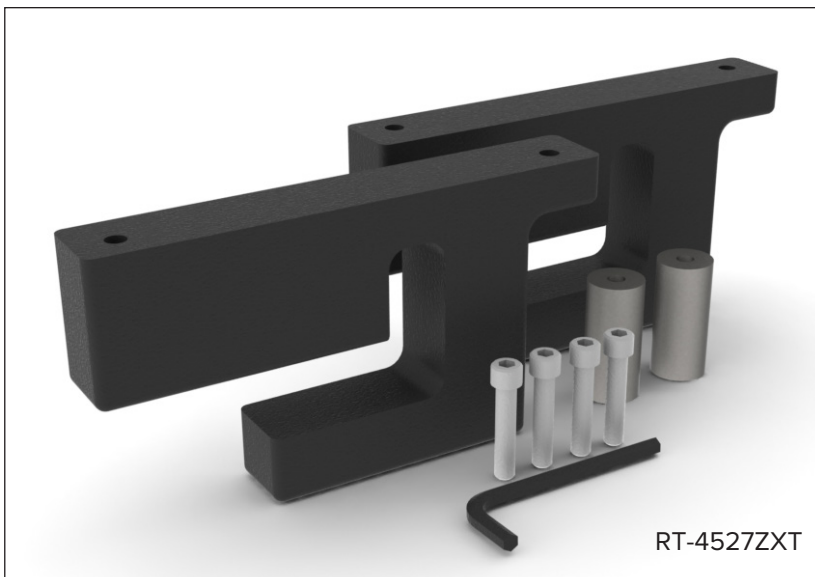

PENYIAPAN ADAPTOR


RT-4527ZXT

1. Ganti tautan pengatur jarak berbentuk persegi di Dipan ZXT dengan tautan pengatur jarak berbentuk bulat yang disediakan. (Gbr. 30)
2. Pasang adaptor pada posisi yang ditunjukkan di bawah ini, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup penutup ukuran 1/4-20 x 1 1/4" dengan Kunci L yang disediakan (Gbr. 31).

! CATATAN ! Terdapat adaptor kanan dan kiri; pastikan bahwa setelah dipasang, adaptor rata dengan sisi perangkat. (Gbr. 32).

! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk cakram.


3. Ulangi pemasangan untuk adaptor di sisi berlawanan (Gbr. 33).
4. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyambungkan adaptor ke tautan pengatur jarak di rel aksesori (Gbr. 34).

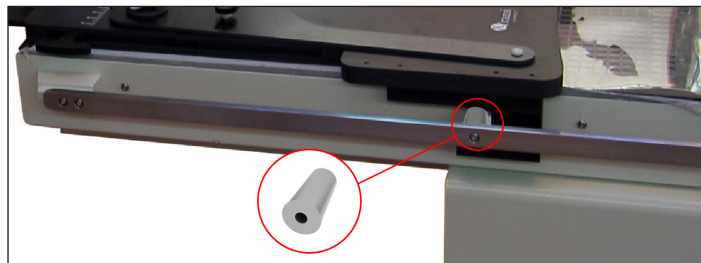


Gbr. 30



Gbr. 31

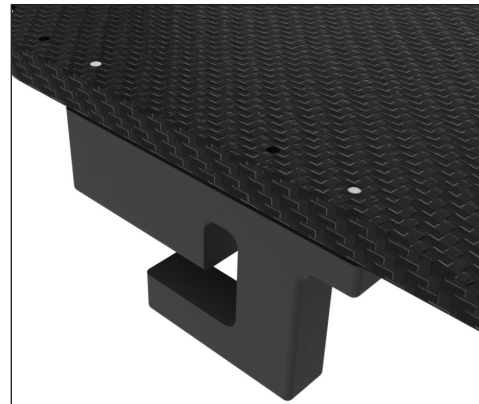

Gbr. 32

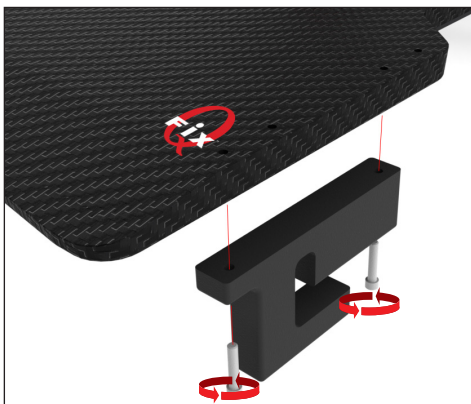

Gbr. 33




Gbr. 34

PENYIAPAN ADAPTOR


RT-4527SKD

SIEMENS KD

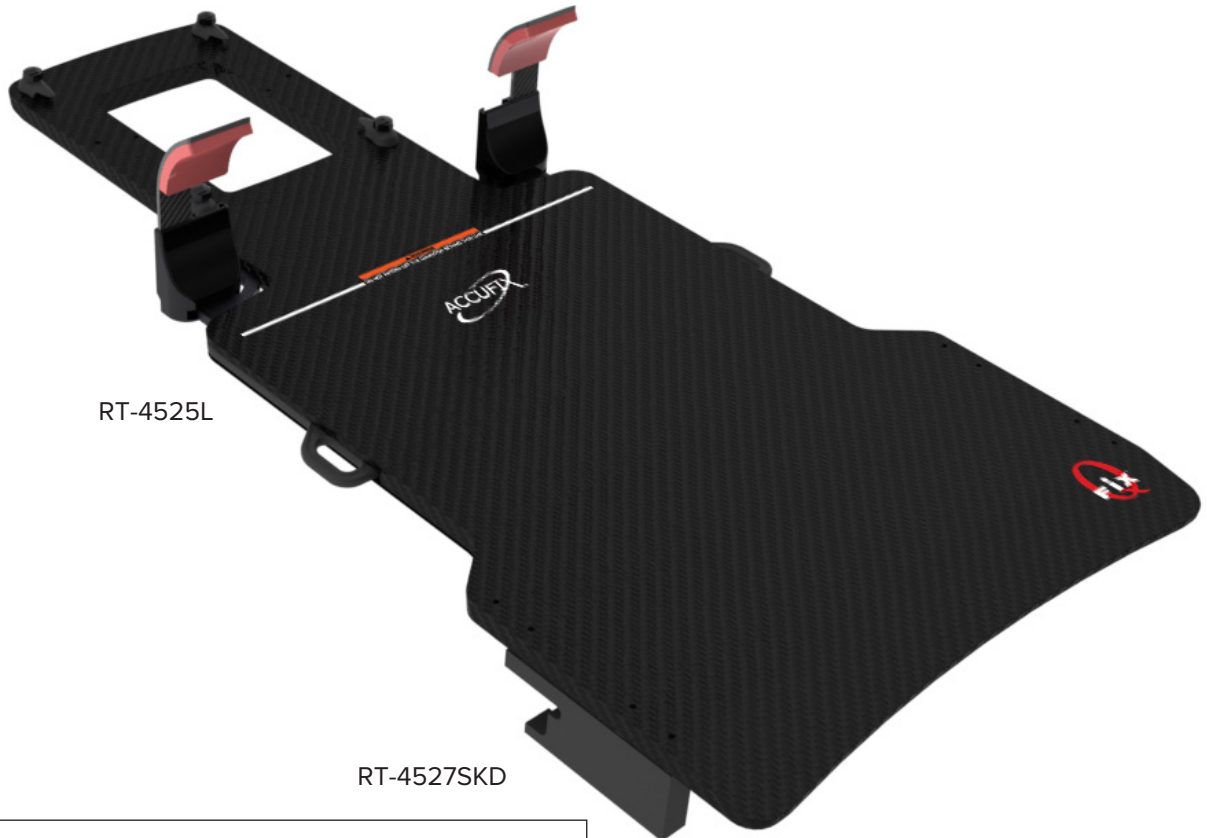

RT-4525L

RT-4527SKD

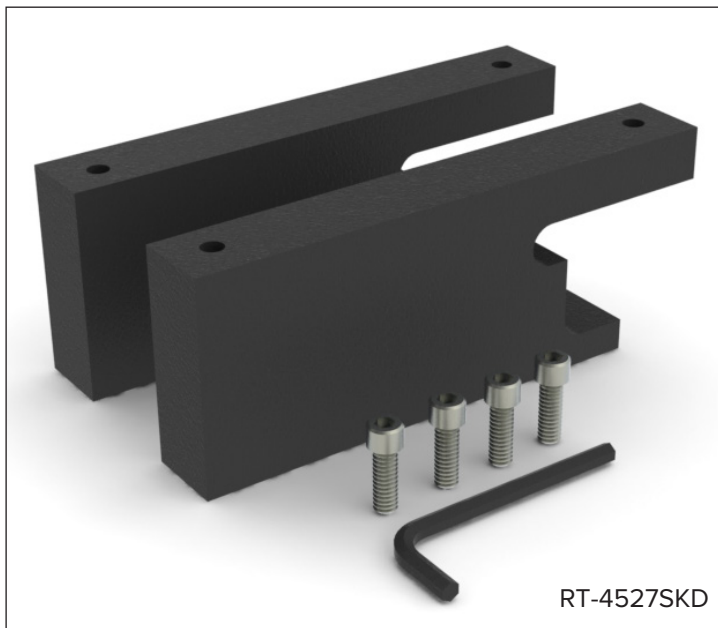

RT-4527SKD

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527SKD

1. Pasang adaptor pada posisi yang ditunjukkan di bawah ini, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup penutup ukuran 1/4-20 x 3/4" dengan Kunci L yang disediakan (Gbr. 35).

! CATATAN ! Terdapat adaptor kanan dan kiri; pastikan bahwa setelah dipasang, adaptor rata dengan sisi perangkat. (Gbr. 36)


! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk cakram.

2. Ulangi pemasangan untuk adaptor di sisi berlawanan (Gbr. 37).


3. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyambungkan adaptor ke tautan pengatur jarak di rel aksesori.



Gbr. 35

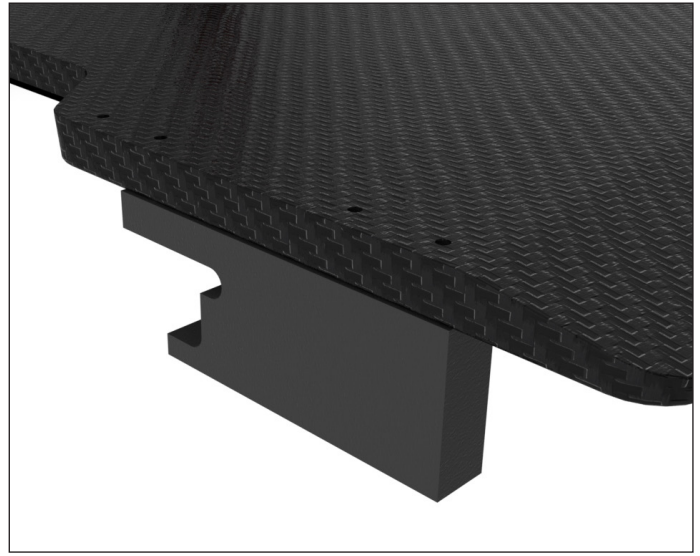

Gbr. 36

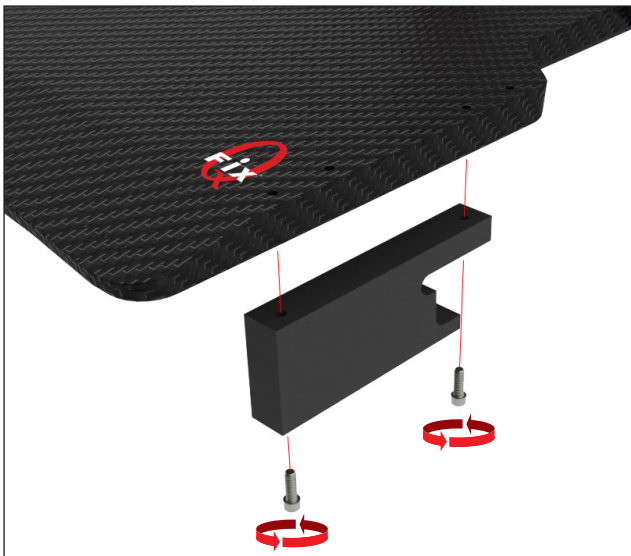

Gbr. 37



Gbr. 38

PENYIAPAN ADAPTOR


RT-4527ETRJ

VARIAN ETR



RT-4525L

RT-4527ETRJ

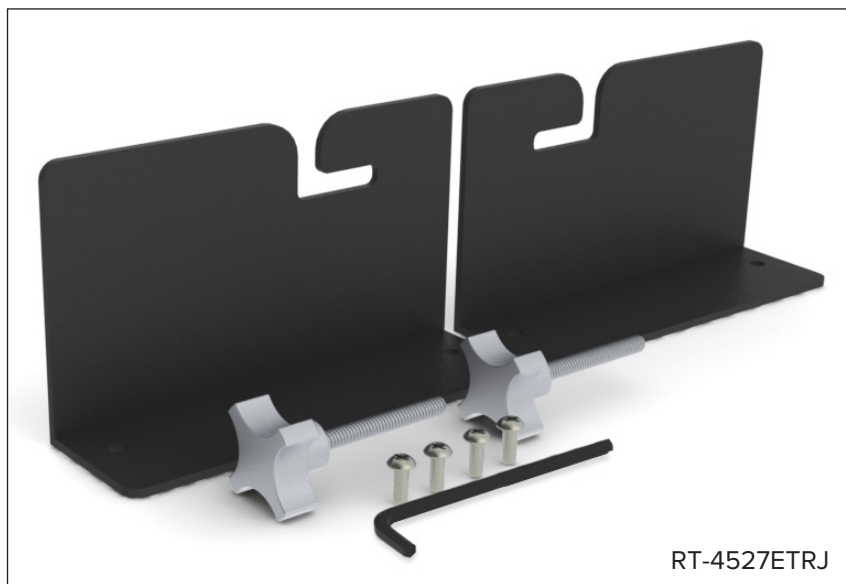

RT-4527ETRJ

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527ETRJ


1. Lepaskan Sekrup L ketiga dari ujung superior dipan ETR menggunakan Kunci L yang disediakan. (Gbr. 39).
 2. Ulangi langkah yang sama pada sisi dipan yang berlawanan.
 3. Ganti sekrup L dengan kenop yang disediakan. Kenop ini sebaiknya tetap terpasang secara permanen sebagai bagian dari dipan. Jangan mengencangkan kenop sepenuhnya; sisakan ruang sekitar 0,5 cm (Gbr. 40).
 4. Ulangi langkah yang sama pada sisi dipan yang berlawanan.
 5. Pasang adaptor pada posisi yang ditunjukkan di bawah ini, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 1/2" (Gbr. 41).
- ! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk cakram.**
6. Ulangi pemasangan untuk adaptor di sisi berlawanan (Gbr. 42).
 7. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyambungkan adaptor ke poros kenop. Kencangkan kenop agar terpasang dengan aman. (Gbr. 43)




Gbr. 39




Gbr. 40

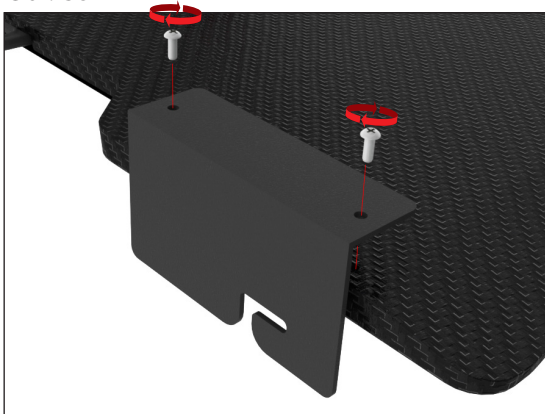

Gbr. 41

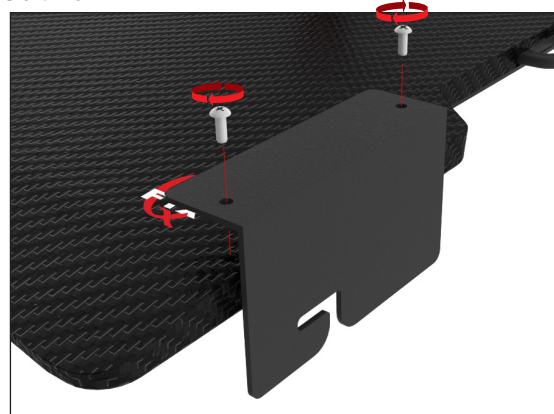

Gbr. 42

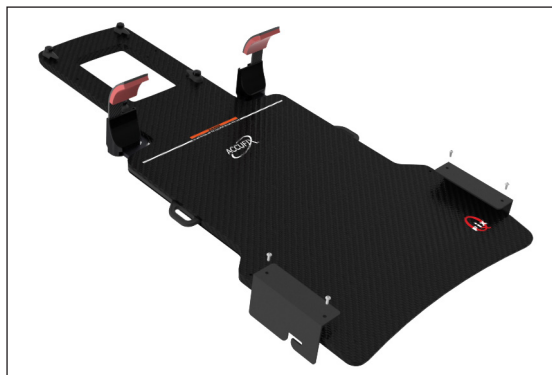


Gbr. 43

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527EXA475

OVERLAY CT BERINDEKS LEBAR 500 MM NARROW EXACT® STYLE

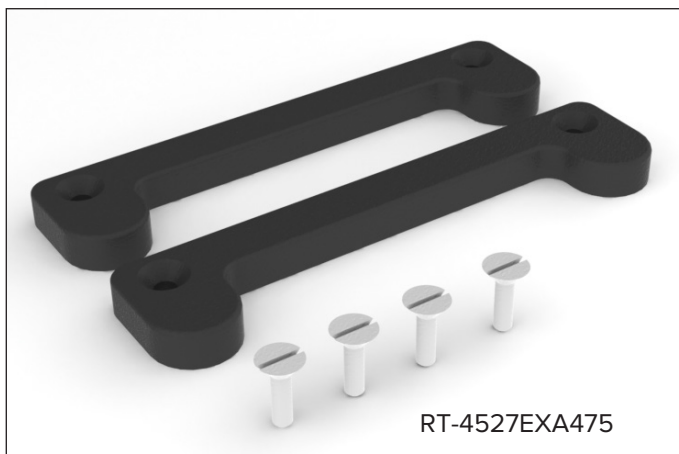

Alat yang Dibutuhkan: Obeng Minus



PERANGKAT *TIDAK* BOLEH DITEMPATKAN DALAM POSISI KANTILEVER MELEBIHI UJUNG BAGIAN ATAS DIPAN KETIKA MENGGUNAKAN ADAPTOR CT INI. MENEMPATKAN PERANGKAT DALAM POSISI KANTILEVER MELEBIHI UJUNG BAGIAN ATAS DIPAN DAPAT MENYEBABKAN PERANGKAT TERJATUH DARI BAGIAN ATAS DIPAN, SEHINGGA MENCEDERAI PASIEN.

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527EXA475

1. Pasang adaptor pada posisi yang ditunjukkan di bawah ini, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 3/4" (Gbr. 44).


! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk cakram.

2. Ulangi pemasangan untuk adaptor di sisi berlawanan (Gbr. 45).

3. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyejajarkan adaptor ke takik pengindeksan. Tekan perangkat ke bawah hingga terpasang dengan kencang.



Gbr. 44

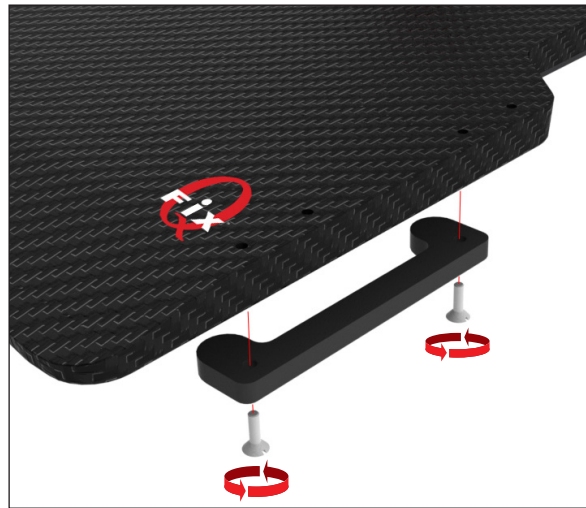

Gbr. 45




Gbr. 46

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527PETCT

OVERLAY PET/CT LEBAR 480 MM PHILIPS GEMINI™ DAN
GE DISCOVERY™ LS

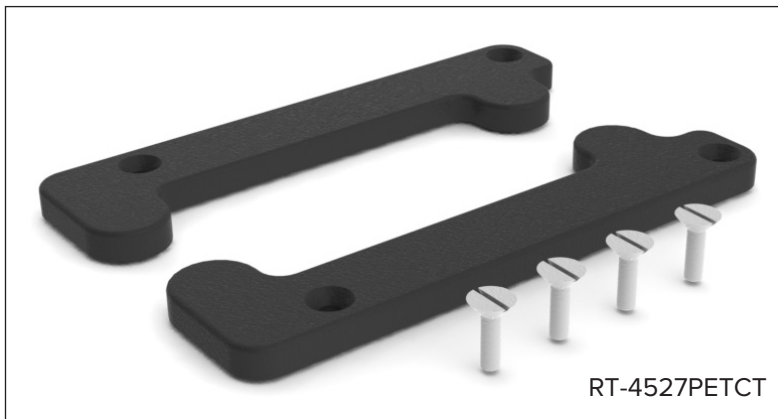

Alat yang Dibutuhkan: Obeng Minus



PERANGKAT *TIDAK* BOLEH DITEMPATKAN DALAM POSISI KANTILEVER MELEBIHI UJUNG BAGIAN ATAS DIPAN KETIKA MENGGUNAKAN ADAPTOR CT INI. MENEMPATKAN PERANGKAT DALAM POSISI KANTILEVER MELEBIHI UJUNG BAGIAN ATAS DIPAN DAPAT MENYEBABKAN PERANGKAT TERJATUH DARI BAGIAN ATAS DIPAN, SEHINGGA MENCEDERAI PASIEN.

PENYIAPAN ADAPTOR

RT-4527PETCT

1. Pasang adaptor pada posisi yang ditunjukkan di bawah ini, di dua lubang yang berjarak 140 mm (5,5"), dengan menggunakan 2 sekrup ukuran 1/4-20 x 3/4" (Gbr. 47).


! CATATAN ! Set lubang mana pun dapat digunakan, tetapi jika ada Hand Grip Array yang dipasang, gunakan set lubang yang tersedia untuk cakram.

2. Ulangi pemasangan untuk adaptor di sisi berlawanan (Gbr. 48).

3. Pasang perangkat pada bagian atas dipan dengan menyejajarkan adaptor ke takik pengindeksan. Tekan perangkat ke bawah hingga terpasang dengan kencang.



Gbr. 47

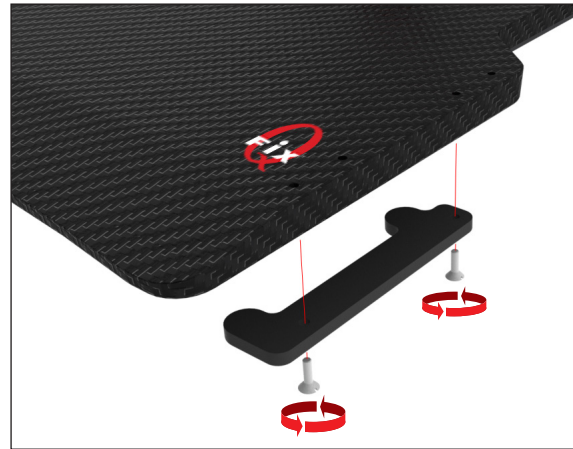

Gbr. 48



Gbr. 49

PEMASANGAN SHIM

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (Gbr. 50)

1. Lepaskan 2 sekrup yang menahan adaptor ke Hand Grip Array.
2. Tempatkan shim di antara adaptor dan hand grip array, dengan menyejajarkan lubang sekrup ke lubang di shim.
3. Pasang kembali kedua sekrup hingga kencang.
4. Lanjutkan dengan petunjuk penyiapan.

RT-4527LMI3 (Gbr. 51)

1. Lepaskan 2 sekrup yang menahan adaptor ke Hand Grip Array.
2. Tempatkan shim di antara adaptor dan hand grip array, dengan menyejajarkan lubang sekrup ke lubang di shim.
3. Pasang kembali kedua sekrup hingga kencang.
4. Lanjutkan dengan petunjuk penyiapan.



Gbr. 50



Gbr. 51



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com