
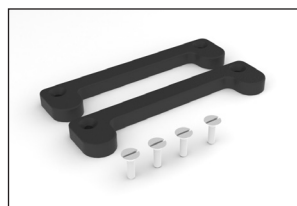
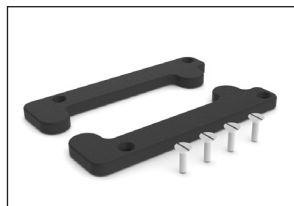
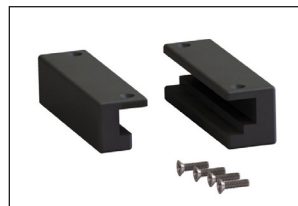
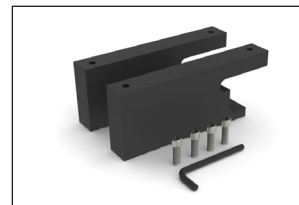
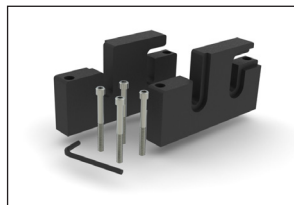
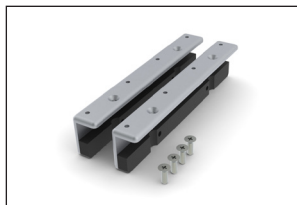
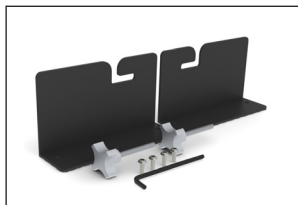
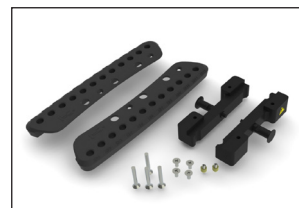
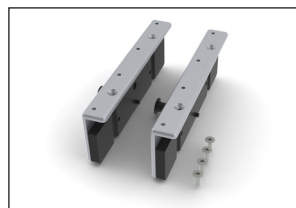
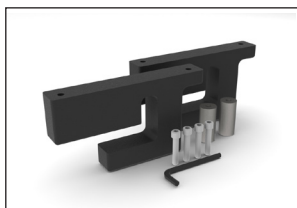


# ОРНАТУ НҰСҚАУЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

## Индекстеу адаптерлері

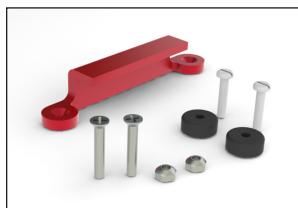

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | <b>UK Responsible Person</b><br>QServe Group UK, Ltd.<br>49 Greek Street<br>Soho, London W1D 4EG<br>United Kingdom |                                                                      |
|  Qfix<br>440 Church Rd,<br>Avondale, Pennsylvania,<br>USA<br>+1 712.737.8688<br>www.CQmedical.com |                                   | Raditec Medical AG<br>Schlossberg 5a<br>5454 Bellikon<br>Switzerland |

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass және Hand Grip Array — Qfix компаниясының сауда белгілері.

Exact® және ETR® — Varian Medical Systems компаниясының тіркелген сауда белгілері.

Medical Intelligence I-Beam — Elekta AB компаниясының сауда белгісі, ал Precise® — Elekta AB компаниясының тіркелген сауда белгісі.

ZXT және TXT — Siemens AG компаниясының сауда белгілері.

Med-Tec Prodigy және IPPS — Civco Medical Solutions компаниясының сауда белгілері.

Gemini — Philips Medical Systems компаниясының сауда белгісі.

Discovery — GE Medical компаниясының сауда белгісі.

# ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

## «АБАЙЛАҢЫЗ» МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

Таңбалардың тізімі мен олардың анықтамаларын CQmedical.com сайтынан қараңыз.

**! АБАЙЛАҢЫЗ ! БҰЛ ЖАБДЫҚҚА ЕШҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУГЕ БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛІГІНЕ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖҮК ТҮССЕ, ОЛ ЗАҚЫМДАЛСА НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРМАСА, ОНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНБАЙ, +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 НӨМІРІ НЕМЕСЕ SUPPORT@CQMEDICAL.COM МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША CQ MEDICAL КОМПАНИЯСЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.**

Адаптерлер Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, CURVE™ Board және BoS™ Headframe құрылғыларына арналған.

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУ

Келесі КТ адаптерлерін пайдаланғанда, құрылғыны кушетка шетіне бекітуге БОЛМАЙДЫ:


- RT-4527LTOMO (бет 7)
- RT-4529M (бет 20)
- RT-4527MTPCT (бет 22)
- RT-4527EXA475 (бет 34)
- RT-4527PETCT (бет 36)

Құрылғыны кушетка шетінің бекітетін болсаңыз, ол кушеткадан құлап науқасқа зақым келтіруі мүмкін.

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

## RT-4527LMI3

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ ЖӘНЕ TOMOTHERAPY  
АДАПТЕРІ

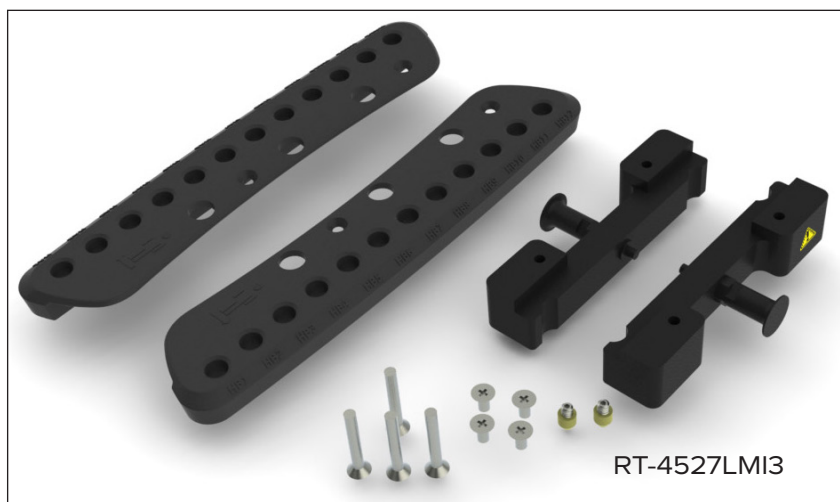

Қажетті құралдар: Кірес басты бұрауыш



**! АБАЙЛАҢЫЗ ! ҚҰРЫЛҒЫ АДАПТЕРІ МЕН КУШЕТКА ҮСТЕЛІНІҢ АРАСЫНДАҒЫ ҚЫСЫМ ЕСКЕРТУ СЫЗЫҒЫНАН АСЫП КЕТСЕ, ҚЫСЫП ҚАЛУ ОРЫНДАРЫ ПАЙДА БОЛУЫ МҮМКІН ЕКЕНІН ЕСКЕРІҢІЗ.**

**4**

**ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ — 2002950\_IFU, Indexing Adapters\_KK**  
CQ Medical | +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 | [www.CQmedical.com](http://www.CQmedical.com)

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527LM13


**! ЕСКЕРТПЕ !** Encompass™ секілді қалыңдығы 28 мм құрылғыға орнатқан кезде, реттеуді бастар алдында 38-беттегі төсемді орнату нұсқауларын қараңыз.

1. ¼-20 x 1 ½ дюйм өлшеміндегі 2 (әрқайсысына) бұrandаны пайдаланып, адаптерлерді әр қол тірегішке орнатыңыз (1-сурет).
2. Сары локациялық конус пішінді адаптерді құрылғының төменгі жағына орнатыңыз (әр жағынан бір-бірінен орнатыңыз). (2 және 2а-сурет)
3. Қол тірегіштерді құрылғыға ¼-20 x ½ дюйм өлшеміндегі 2 (әрқайсысына) бұrandаны пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз. (3-сурет)


**! ЕСКЕРТПЕ !** Құрылғы адаптері мен кушетка үстелінің арасындағы қысым ескерту сызығынан асып кетсе, қысып қалу орындары пайда болуы мүмкін.

**! ЕСКЕРТПЕ !** Қол тірегішті орнату бойынша қосымша ақпарат алу үшін, қол тірегіштің өнім нұсқаулығы мен пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

4. Құрылғыны кушетканың жоғарғы жағының жоғарғы бетіндегі сары конусты бағыттағыш саңылаулармен туралай отырып, кушетканың төбе жағына орналастырыңыз. Құрылғыны кушетканың үстіңгі жағына бекіту/босату үшін поршеньді бұрап, тартыңыз.

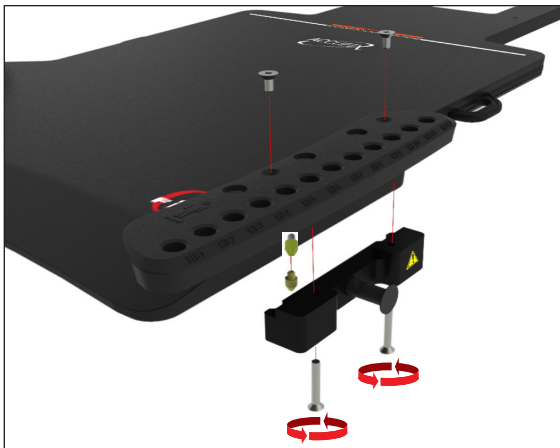


1-сурет

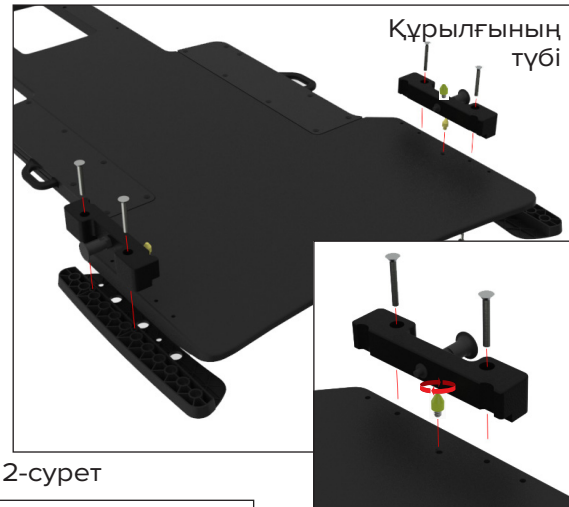

2-сурет

2а суреті

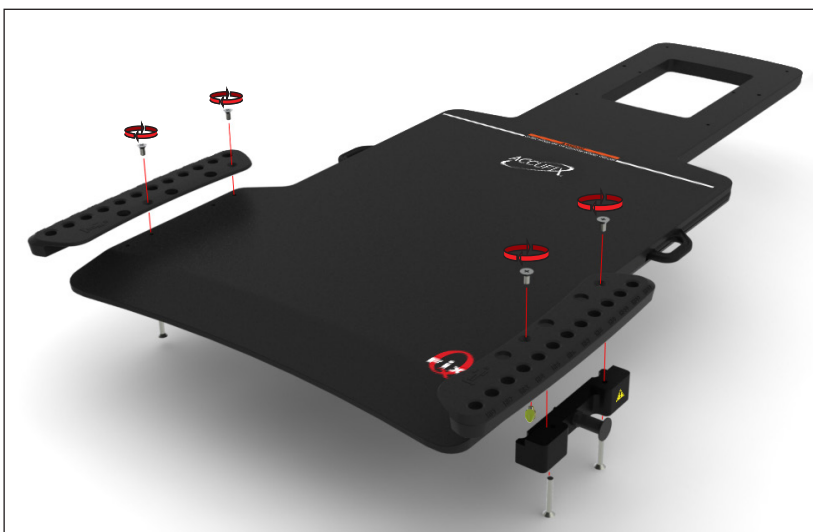

3-сурет


# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527LTOMO



**! АБАЙЛАҢЫЗ ! БҰЛ АДАПТЕРДІ ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУШЕТКАНЫҢ ШЕТКІ ЖАҒЫНА БЕКІТУГЕ БОЛМАЙДЫ; БҰЛ ӘРЕКЕТІҢІЗДЕН ҚҰРЫЛҒЫ КУШЕТКА ҮСТІНЕН ҚҰЛАП, НАУҚАСТЫ ЖАРАҚАТТАУЫ МҮМКІН.**

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527LTOMO

1. Сары локациялық конус пішінді адаптерді құрылғының төменгі жағына орнатыңыз (әр жағынан бір-бірден орнатыңыз) (4 және 5-сурет).
2. Құрылғыны кушетканың жоғарғы жағының жоғарғы бетіндегі сары конусты бағыттағыш саңылаулармен туралай отырып, кушетканың төбе жағына орналастырыңыз.

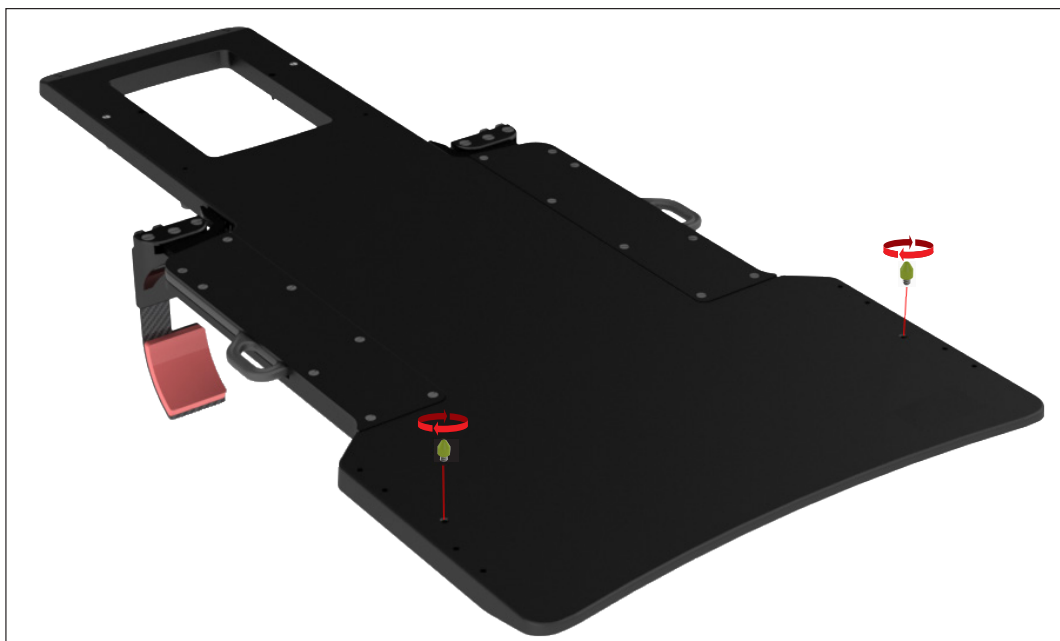

4-сурет



5-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527MI

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ ЖӘНЕ  
TOMOTHERAPY АДАПТЕРІ



RT-4527MI  
Тек CURVE™  
панелімен  
пайдалануға  
болады



Қажетті құралдар: Кірес басты бұрауыш

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527MI


1. Төменде көрсетілгендей  $\frac{1}{4}$ -20 x  $\frac{1}{2}$  дюйм өлшеміндегі 2 (әрқайсысы) бұранданы пайдаланып, кез келген адаптерді құрылғының бір жағына орнатыңыз. (6-сурет)

**! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда адаптерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.


2. Қарама-қарсы жақтағы адаптерді орнату үшін, осы қадамдарды қайталаңыз (7-сурет).

3. 2 істікшелі орнату жолағын өзіңізге ыңғайлы орынға қойыңыз (бекітілгеннен кейін орнатылатын жолақтарының істікшелері құрылғының астыңғы жағындағы тесіктерге сәйкес келеді) (6, 7 және 8-сурет).

4. Екі адаптердің үлкенін алдымен кушетканың үстіңгі жағына, содан кейін кішірек адаптерге іле отырып, құрылғыны кушетканың үстіңгі жағына орнатыңыз және 2 істікшелі орнатылатын жолақты пайдаланып құрылғыны бекітіңіз.

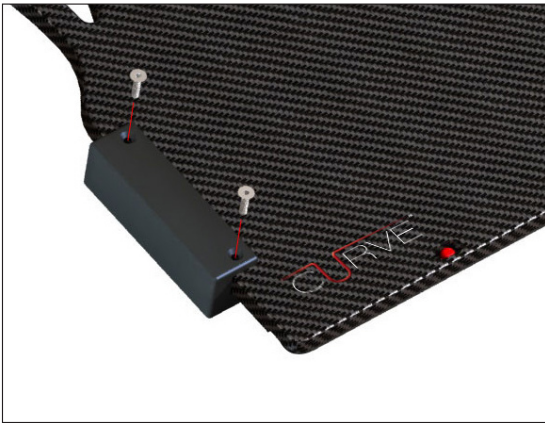

6-сурет

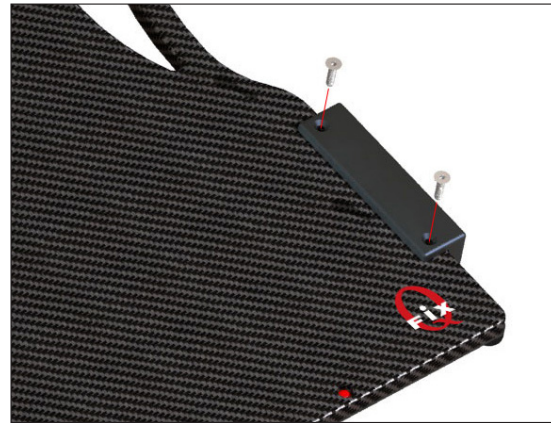


7-сурет



8-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527EXAG

VARIAN EXACT® АДАПТЕРІ

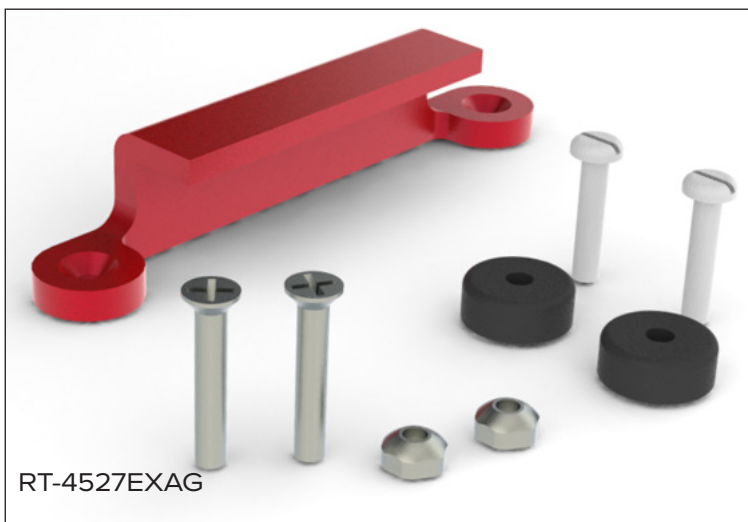

Қажетті құралдар: Кірес басты және жалпақ басты бұрауыш

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527EXAG

1. Қызыл адаптерді құрылғыға  $\frac{1}{4}$ -20 x  $1\frac{3}{8}$  дюйм өлшеміндегі 2 бұранданы пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз. Содан кейін  $\frac{1}{4}$ -20 өлшемді 2 сақтандыру гайнасын құрылғының үстіңгі жағындағы бұрандаларға бекітіңіз (9-сурет).


**! ЕСКЕРТПЕ !** Адаптерді құрылғының оң немесе сол жағына орнатуға болады. Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда адаптерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2.  $\frac{1}{4}$ -20 x  $1\frac{1}{4}$  дюйм өлшеміндегі бұрандаларды (әрқайсысы үшін 1 дана) пайдаланып, сәйкес саңылауларға бекітілетін адаптердің қарама-қарсы жағындағы 2 бекітілетін дискіні орнатыңыз (10-сурет).

3. Қызыл адаптерді бір жағына ілу арқылы құрылғыны кушетканың үстіңгі жағына орнатыңыз да, орналасқан жерін бекітілетін дискілері бар жағын бекітілгенше бағыттағыш ойықтарға қарай төмен итеріңіз.



9-сурет

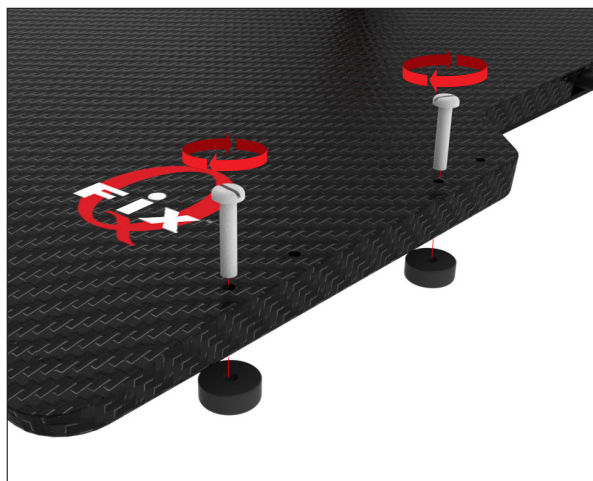

10-сурет



11-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527QFIX

QFIX™ KVUE™ ЖӘНЕ QUANTUM™ АДАПТЕРІ



Қажетті құралдар: Кірес басты және жалпақ басты бұрауыш

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527QFIX

1. Адаптерді құрылғыға  $\frac{1}{4}$ -20 x  $\frac{3}{4}$  дюйм өлшеміндегі 2 бұруданы пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз. Адаптердің шығыңқы жағы бар бөлігі ішке қарағанына (Qfix құрылғысының шығыңқы жеріне бекітілетіндей етіп) көз жеткізіңіз (12-сурет).


**! ЕСКЕРТПЕ !** Адаптерді құрылғының оң немесе сол жағына орнатуға болады. Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда адаптерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2.  $\frac{1}{4}$ -20 x 1  $\frac{1}{4}$  дюйм өлшеміндегі бұрандаларды (әрқайсысы үшін 1 дана) пайдаланып, сәйкес саңылауларға бекітілетін адаптердің қарама-қарсы жағындағы 2 бекітілетін дискіні орнатыңыз (13-сурет).

3. Адаптерді кушетканың жоғарғы бөлігінің бір жағына ілу арқылы құрылғыны кушетканың үстіңгі жағына орнатыңыз да, орналасқан жерін бекітілетін дискілері бар жағын бекітілгенше бағыттағыш ойықтарға қарай төмен итеріңіз.



12-сурет

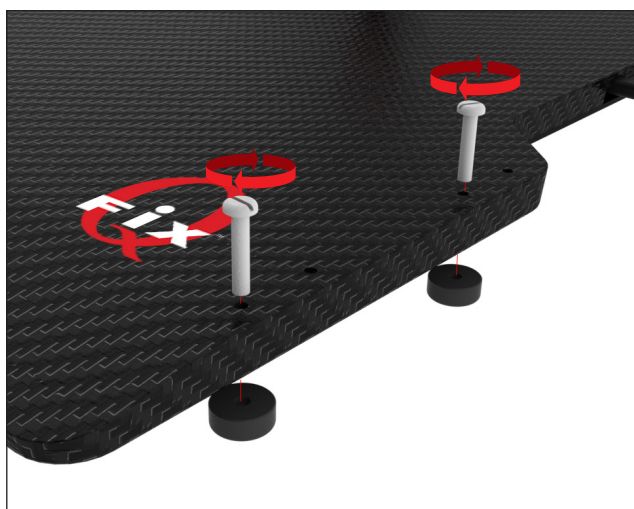


13-сурет



14-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

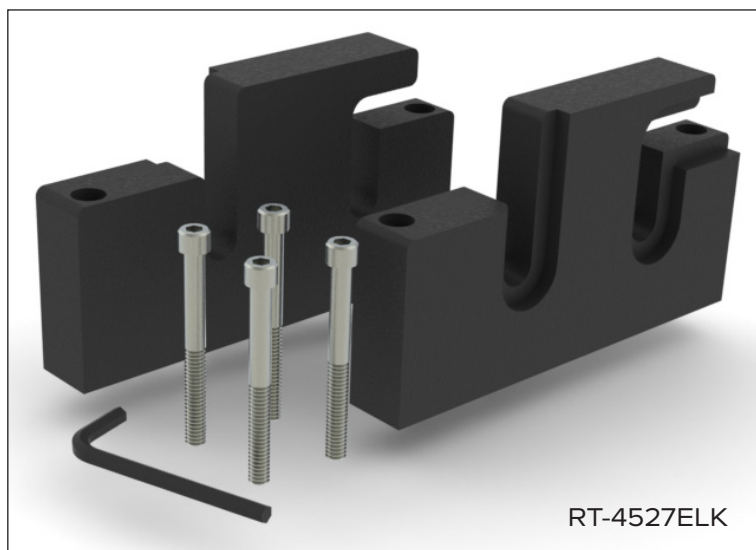


# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527ELK

1. Адаптерді тегіс жағын құрылғының сыртқы жағына қаратып және төменде көрсетілген күйде  $\frac{1}{4}$ -20 x 2  $\frac{1}{2}$  дюйм өлшеміндегі 2 бұранданы пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз (14-сурет).


**! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда адаптерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2. Адаптердің тегіс жағын сыртқа қаратып, қарама-қарсы жағындағы адаптерді тура сол қадамдармен орнатыңыз (15-сурет).

3. Адаптерді аксессуарларға арналған тірекке бекітіп, құрылғыны кушетканың жоғарғы жағына орнатыңыз.

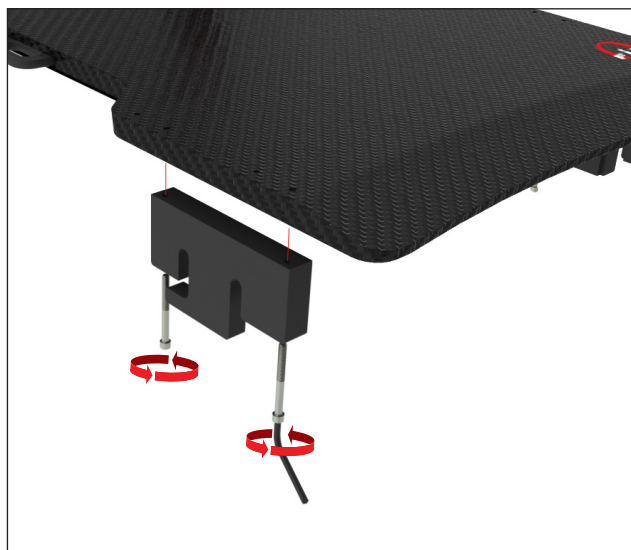

15-сурет

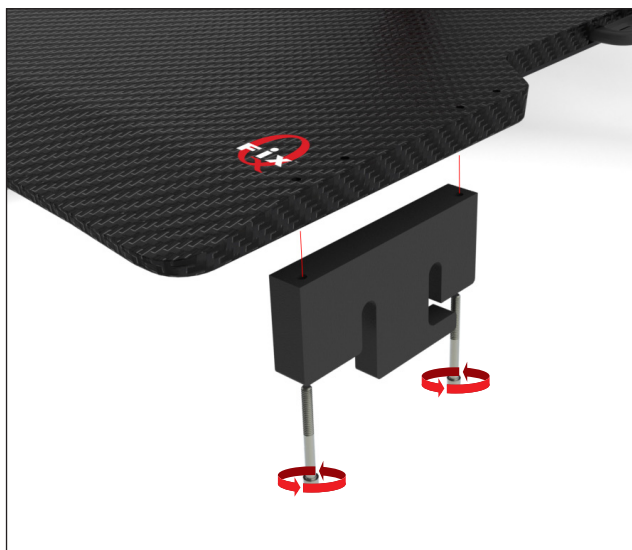

16-сурет



17-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4529M

VARIAN EXACT® АДАПТЕРІМЕН ҮЙЛЕСІМДІ КТ



Қажетті құралдар: Жалпақ басты бұрауыш



КТАДАПТЕРІНПАЙДАЛАНҒАНДА, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУШЕТКА ШЕТІНЕ БЕКІТУГЕ БОЛМАЙДЫ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУШЕТКА ШЕТІНІҢ БЕКІТЕТІН БОЛСАҢЫЗ, ОЛ КУШЕТКАДАН ҚҰЛАП НАУҚАСҚА ЗАҚЫМ КЕЛТІРУІ МҮМКІН.


# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4529M

1. Локациялық 2 дискіні  $\frac{1}{4}$ -20 x 1  $\frac{1}{4}$  дюйм өлшеміндегі бұранданы (әрқайсысына 1) пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз. (17-сурет).


**! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда дискілерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2.  $\frac{1}{4}$ -20 x 1  $\frac{1}{4}$  дюйм өлшеміндегі бұрандаларды (әрқайсысы үшін 1 дана) пайдаланып, қалған 2 бекітілетін дискіні қарама-қарсы жаққа бірінші екі диск сияқты сәйкес тесіктерге орнатыңыз (18-сурет).

3. Құрылғыны кушетка бетіне бекітілетін дисткілерді бағыттағыш ойықтарына сәйкестендіре отырып орнатыңыз. Құрылғы нық бекітілгенше басыңыз.

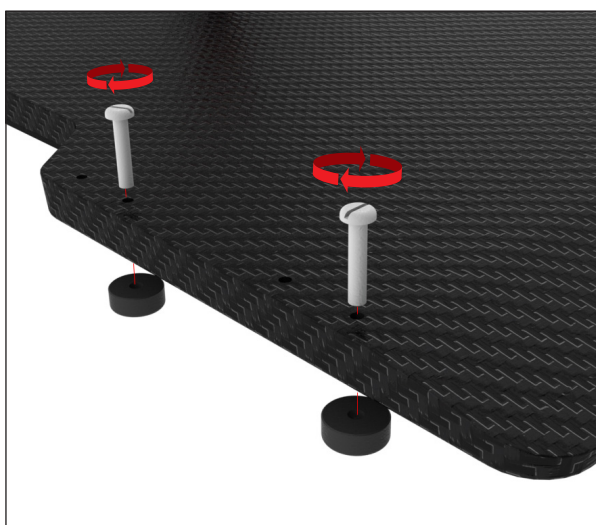

18-сурет

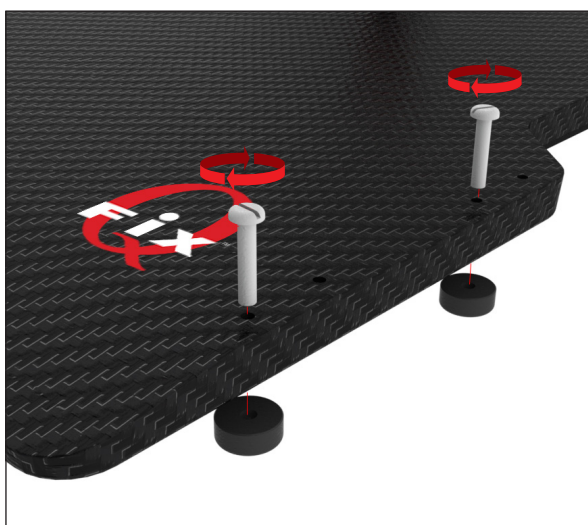


19-сурет



20-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527MTPCT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ KT

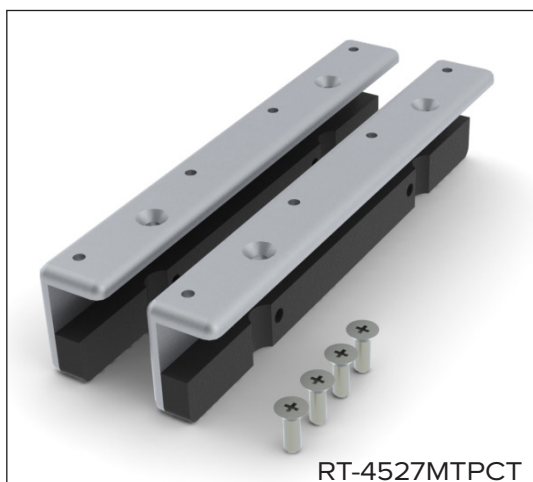

Қажетті құралдар: Кірес басты  
бұрауыш



КТАДАПТЕРІНПАЙДАЛАНҒАНДА, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУШЕТКА ШЕТІНЕ БЕКІТУГЕ БОЛМАЙДЫ.  
ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУШЕТКА ШЕТІНІҢ БЕКІТЕТІН БОЛСАҢЫЗ, ОЛ КУШЕТКАДАН ҚҰЛАП  
НАУҚАСҚА ЗАҚЫМ КЕЛТІРУІ МҮМКІН.


# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527MTRCT

1. Адаптерді төменде көрсетілген күйде, яғни 1/4-20 x 3/4 дюйм өлшеміндегі 2 бұранданы пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз (20 және 21-сурет).


**! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда адаптерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2. Адаптердің тегіс жағын сыртқа қаратып, қарама-қарсы жағындағы адаптерді тура сол қадамдармен орнатыңыз.

3. Адаптерлерді кушетканың үстіңгі жағындағы бағыттағыштармен туралай отырып, құрылғыны орнатыңыз. Құрылғы нық бекітілгенше басыңыз.

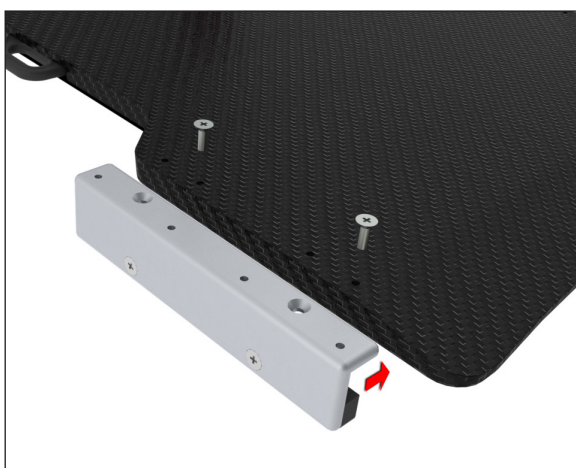

21-сурет

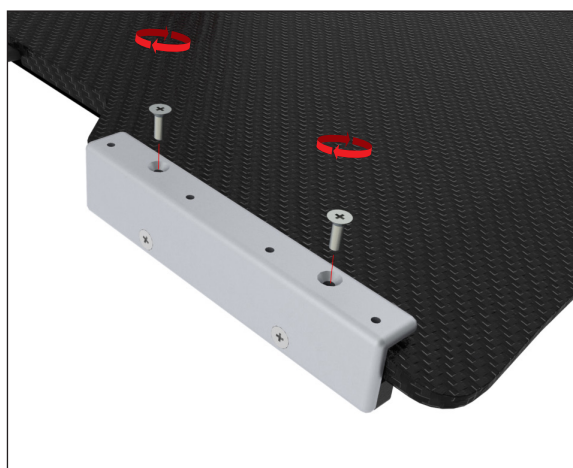


22-сурет



23-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

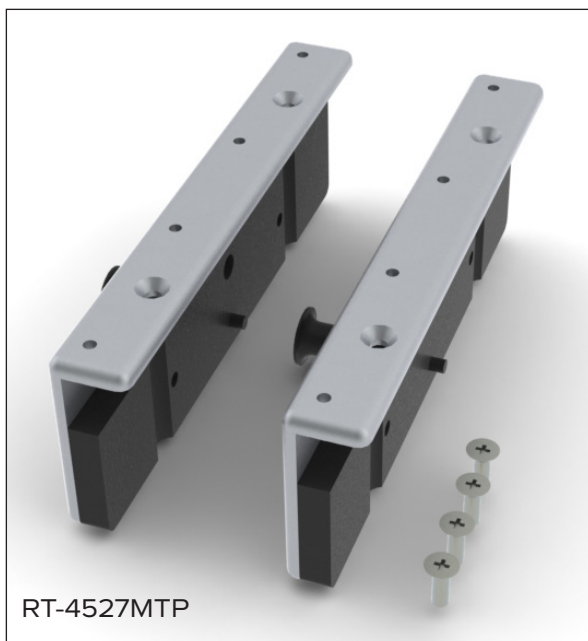

Қажетті құралдар: Кірес басты  
бұрауыш

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527MTP

1. Адаптерді төменде көрсетілген күйде, яғни 1/4-20 x 3/4 дюйм өлшеміндегі 2 бұранданы пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз (24 және 25-сурет).

**! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда адаптерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2. Қарама-қарсы жақтағы адаптерді орнату үшін, осы қадамдарды қайталаңыз.

3. Адаптерлерді кушетканың үстіңгі жағындағы бағыттағыштармен туралай отырып, құрылғыны орнатыңыз. Құрылғыны кушетканың үстіңгі жағына бекіту/босату үшін поршеньді бұрап, тартыңыз.



24-сурет




25-сурет



26-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

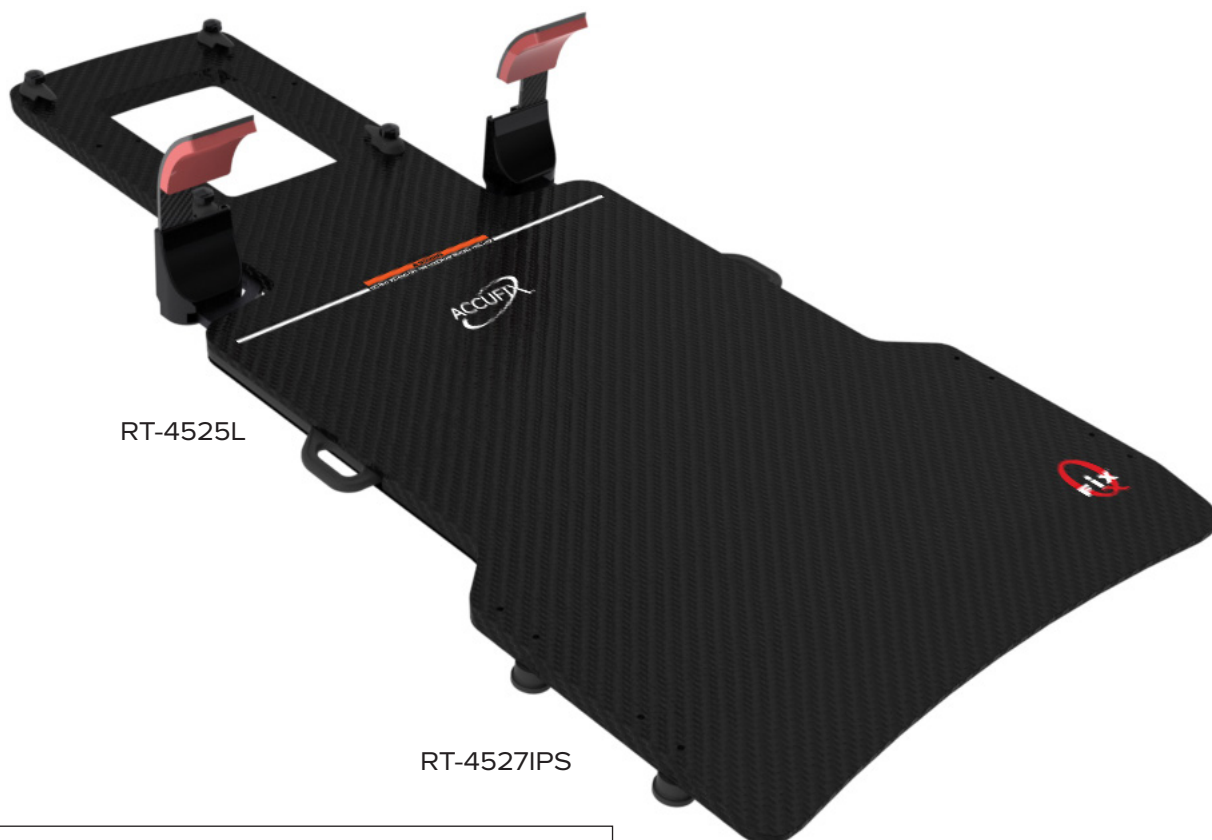

RT-4525L

RT-4527IPS



RT-4527IPS


# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527IPS

1. Локациялық 2 дискіні (дөңесі бар)  $\frac{1}{4}$ 20 x 1  $\frac{1}{4}$  дюйм өлшеміндегі бұранданы (әрқайсысына 1) пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз. (27-сурет).


**! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда дискілерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2.  $\frac{1}{4}$ -20 x 1  $\frac{1}{4}$  дюйм өлшеміндегі бұрандаларды (әрқайсысы үшін 1 дана) пайдаланып, қалған 2 бекітілетін дискіні (шығыңқы бөлігінсіз) қарама-қарсы жаққа бірінші екі диск сияқты сәйкес тесіктерге орнатыңыз (28-сурет).

3. Дискілерді бағыттағыш ойықтармен туралау арқылы құрылғыны кушетканың үстіңгі жағына орнатыңыз, содан кейін шығыңқы бөлігі бар дискілерді алдымен кушетканың үстіңгі жағына іліңіз. Құрылғы бекітілгенге дейін екінші жағын басыңыз.

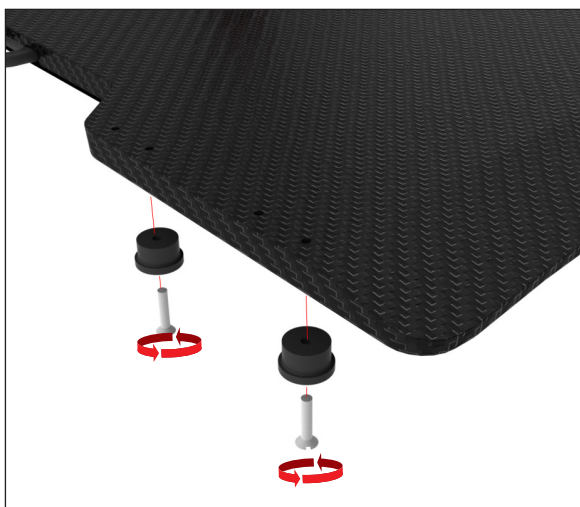

27-сурет

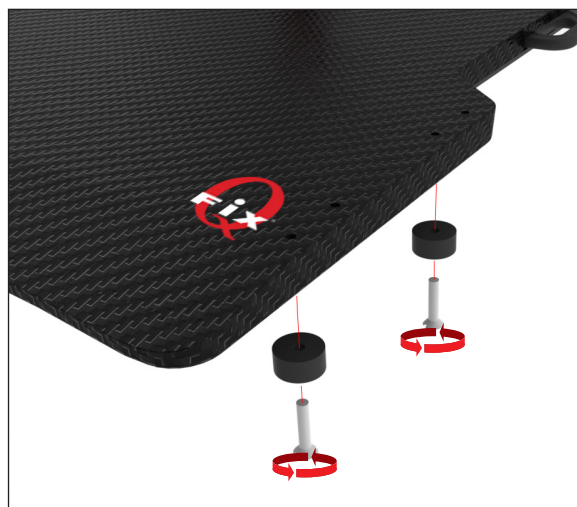

28-сурет



29-сурет


# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT



RT-4525L


RT-4527ZXT

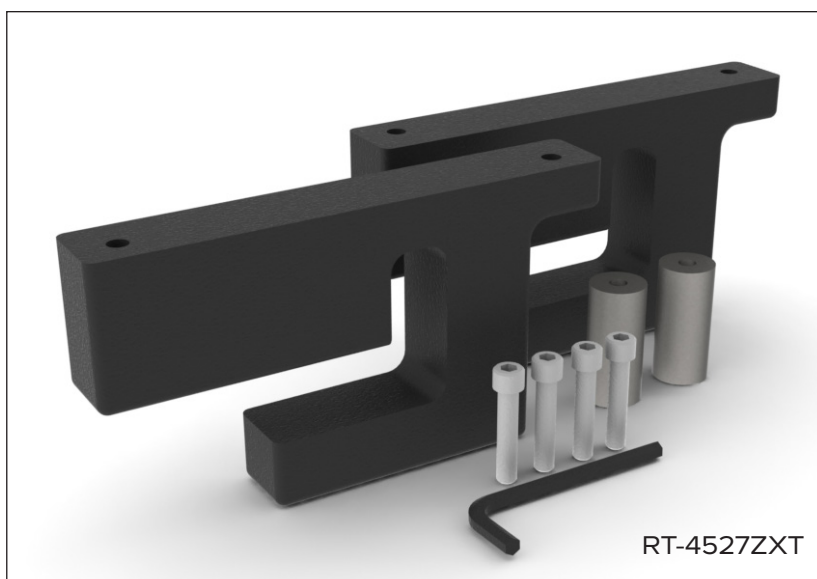

RT-4527ZXT

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527ZXT


1. ZXT кушеткасындағы шаршы тіреуді жинақтағы дөңгелек тіреуге ауыстырыңыз. (30-сурет)
2. Адаптерді төменде көрсетілген күйде, яғни  $\frac{1}{4}$ -20 x  $1\frac{1}{4}$  дюйм өлшеміндегі алтыбұрыш кілтпен жүретін 2 басты бұrandаны пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз (31-сурет).
- ! ЕСКЕРТПЕ !** Адаптер оң жақ және сол жақ болып бөлінеді; орнатқаннан кейін адаптердің құрылғының бүйірімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. (32-сурет).
- ! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда дискілерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.
3. Қарама-қарсы жақтағы адаптерді орнату үшін, осы қадамдарды қайталаңыз (33-сурет).
4. Адаптерді аксессуарларға арналған тірекке бекітіп, құрылғыны кушетканың жоғарғы жағына орнатыңыз (34-сурет).

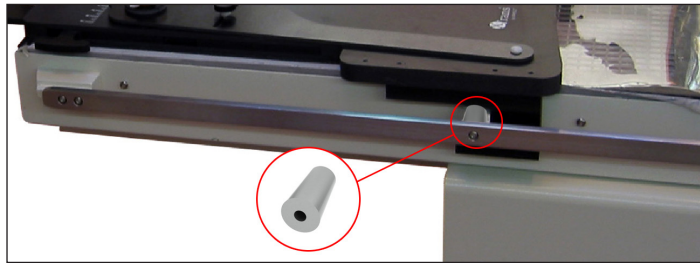


30-сурет



31-сурет

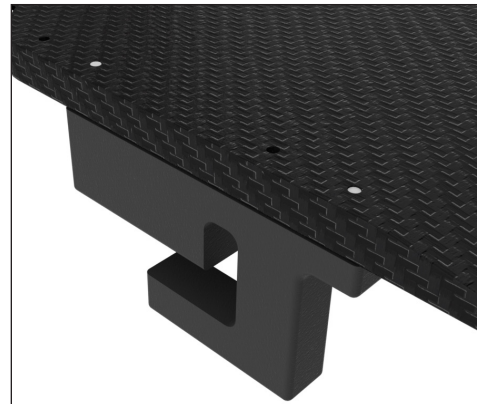

32-сурет

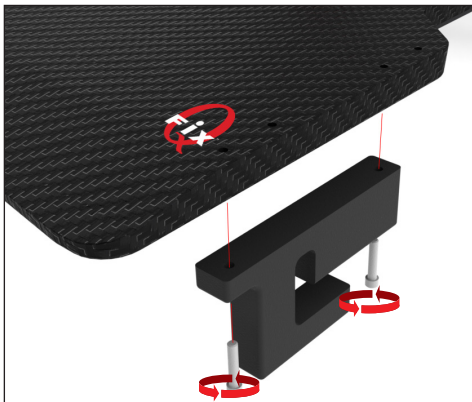

33-сурет



34-сурет


# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527SKD

SIEMENS KD



RT-4525L

RT-4527SKD

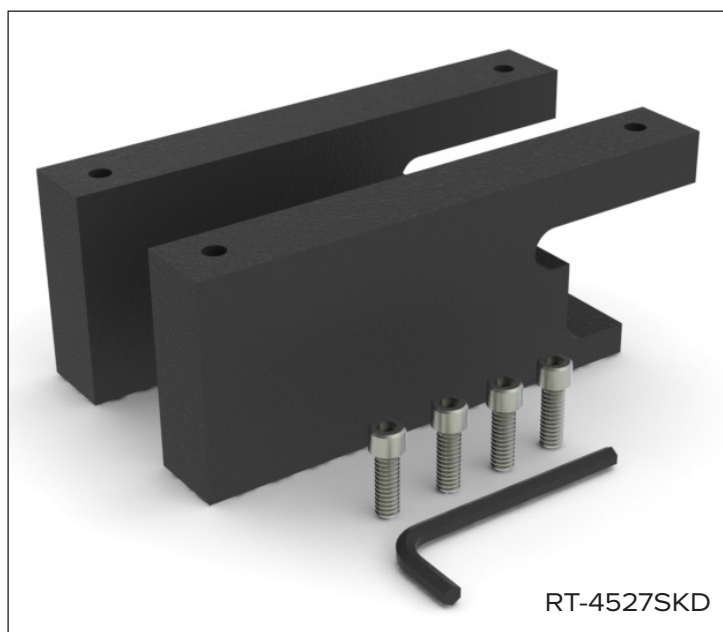

RT-4527SKD

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527SKD

1. Адаптерді төменде көрсетілген күйде, яғни 1/4-20 x 3/4 дюйм өлшеміндегі алтыбұрыш кілтпен жүретін 2 басты бұранданы пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз (35-сурет).

**! ЕСКЕРТПЕ !** Адаптер оң жақ және сол жақ болып бөлінеді; орнатқаннан кейін адаптердің құрылғының бүйірімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. (36-сурет)


**! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда дискілерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2. Қарама-қарсы жақтағы адаптерді орнату үшін, осы қадамдарды қайталаңыз (37-сурет).


3. Адаптерді аксессуарларға арналған тірекке бекітіп, құрылғыны кушетканың жоғарғы жағына орнатыңыз.



35-сурет

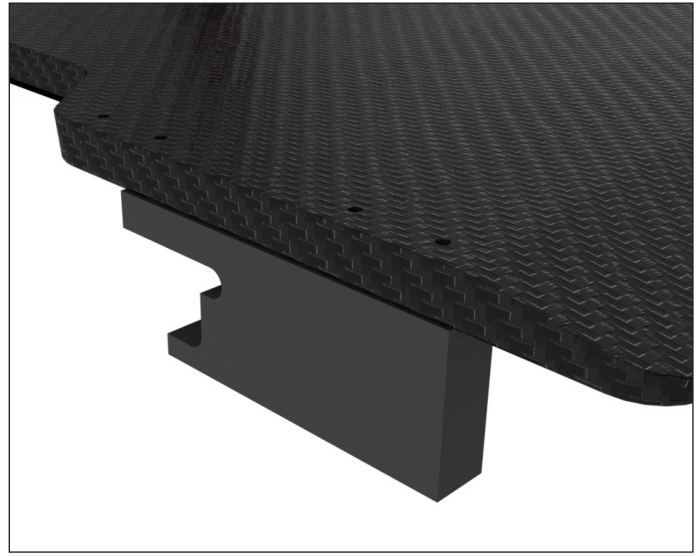

36-сурет

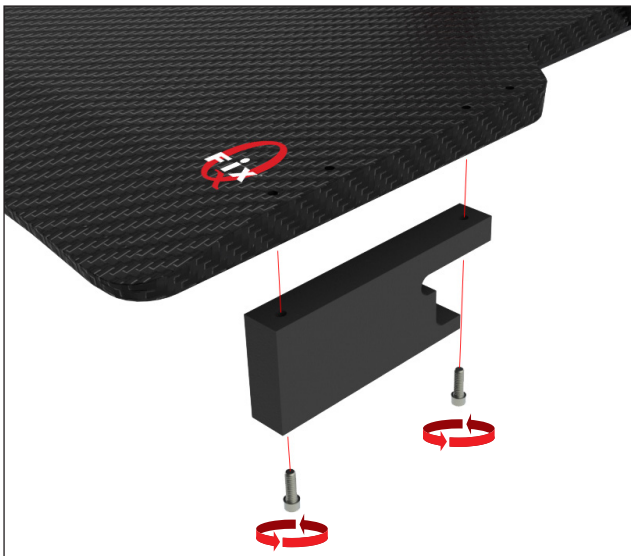


37-сурет



38-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527ETRJ

VARIAN ETR

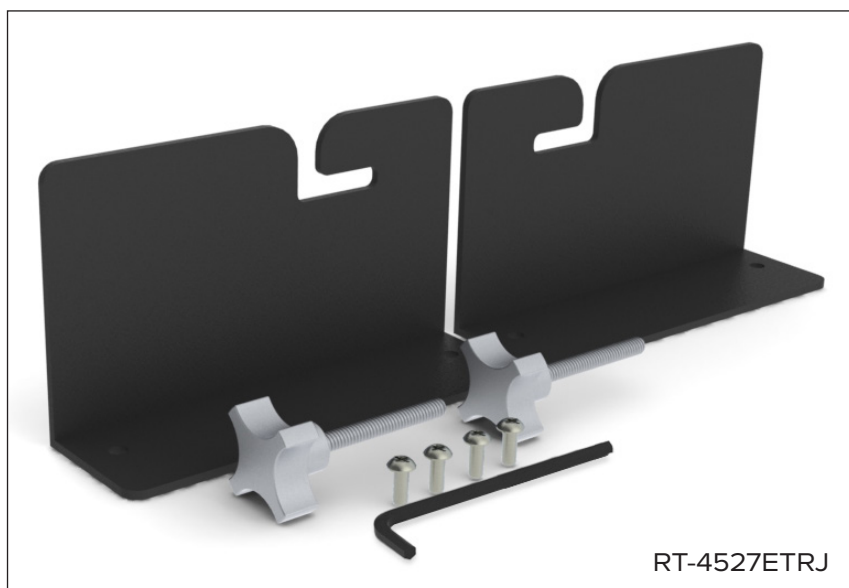

RT-4527ETRJ

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527ETRJ


1. Жинақтағы алтыбұрыш кілтті пайдаланып, ETR кушеткасының жоғарғы шетінен үшінші алтыбұрыш бұrandаны шешіңіз. (39-сурет).
  2. Осы қадамдарды кушетканың арғы шетіне орындаңыз.
  3. Алтыбұрыш бұrandаны жинақтағы тұтқаға ауыстырыңыз. Бұл тұтқа біржола кушетканың бөлігі болып қалуы тиіс. Тұтқаны толығымен қатайтпаңыз; арасында 0,5 см қалдырыңыз (40-сурет).
  4. Осы қадамдарды кушетканың арғы шетіне орындаңыз.
  5. Адаптерді төменде көрсетілген күйде, яғни 1/4-20 x 1/2 дюйм өлшеміндегі 2 бұrandаны пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз (41-сурет).
- ! ЕСКЕРТПЕ ! Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда дискілерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.**
6. Қарама-қарсы жақтағы адаптерді орнату үшін, осы қадамдарды қайталаңыз (42-сурет).
  7. Адаптерді тұтқаның білігіне бекітіп, құрылғыны кушетканың жоғарғы жағына орнатыңыз. Бекіту үшін тұтқаны қатайтыңыз. (43-сурет)




39-сурет




40-сурет

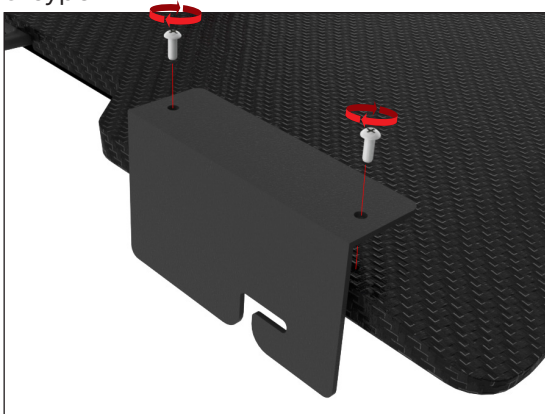

41-сурет

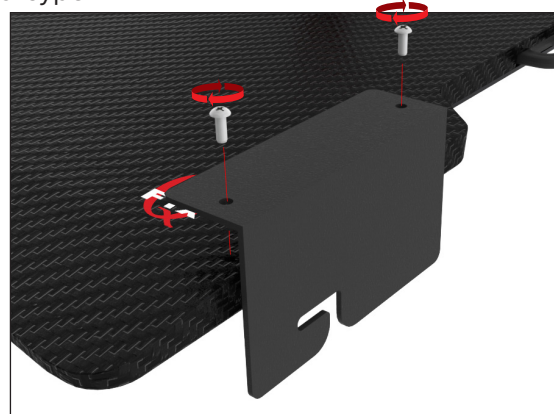


42-сурет

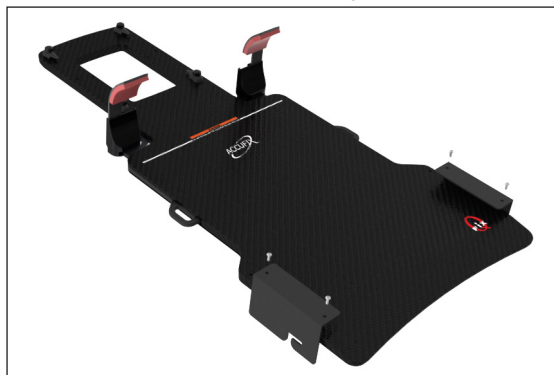

43-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527EXA475

ТАР ЕХАСТ® СТИЛІНДЕГІ ЕНІ 500 ММ БАҒЫТТАҒЫШЫ  
БАҒ

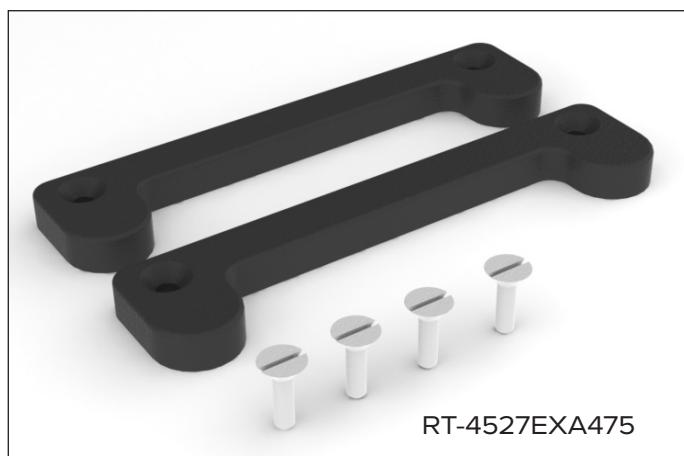

Қажетті құралдар: Жалпақ басты бұрауыш



КТАДАПТЕРІНПАЙДАЛАНҒАНДА,ҚҰРЫЛҒЫНЫКУШЕТКАШЕТІНЕБЕКІТУГЕБОЛМАЙДЫ.  
ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУШЕТКА ШЕТІНІҢ БЕКІТЕТІН БОЛСАҢЫЗ, ОЛ КУШЕТКАДАН ҚҰЛАП  
НАУҚАСҚА ЗАҚЫМ КЕЛТІРУІ МҮМКІН.

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527EXA475

1. Адаптерді төменде көрсетілген күйде, яғни 1/4-20 x 3/4 дюйм өлшеміндегі 2 бұранданы пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз (44-сурет).

**! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда дискілерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2. Қарама-қарсы жақтағы адаптерді орнату үшін, осы қадамдарды қайталаңыз (45-сурет).

3. Құрылғыны кушетка бетіне адаптерлерін орнату ойықтарына сәйкестендіре отырып орнатыңыз. Құрылғыны бекітілгенше басыңыз.



44-сурет




45-сурет



46-сурет

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527PETCT

PHILIPS GEMINI™ ЖӘНЕ GE DISCOVERY™ LS (EH1 480 MM  
ПЭТ/КТ ҚАБАТЫ)

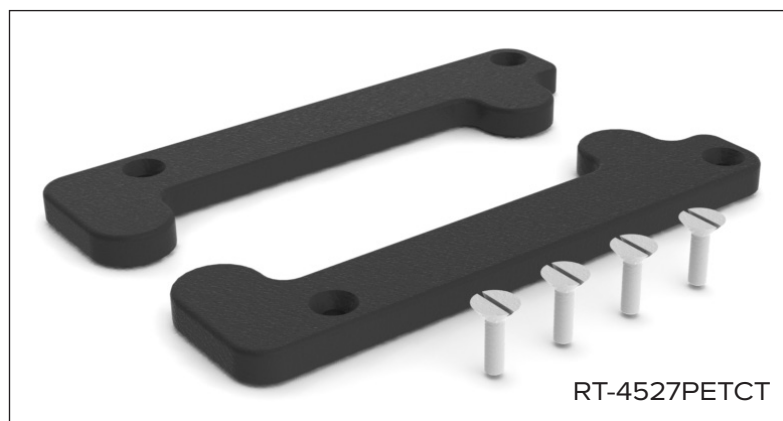

Қажетті құралдар: Жалпақ басты бұрауыш



КТ АДАПТЕРІН ПАЙДАЛАНҒАНДА, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУШЕТКА ШЕТІНЕ БЕКІТУГЕ БОЛМАЙДЫ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КУШЕТКА ШЕТІНІҢ БЕКІТЕТІН БОЛСАҢЫЗ, ОЛ КУШЕТКАДАН ҚҰЛАП НАУҚАСҚА ЗАҚЫМ КЕЛТІРУІ МҮМКІН.

# АДАПТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ RT-4527RETCT

1. Адаптерді төменде көрсетілген күйде, яғни  $\frac{1}{4}$ -20 x  $\frac{3}{4}$  дюйм өлшеміндегі 2 бұранданы пайдаланып, бір-бірінен 140 мм (5,5 дюйм) қашықтықта орналасқан екі саңылауға орнатыңыз (47-сурет).

**! ЕСКЕРТПЕ !** Қай саңылау жинағы пайдаланылатыны маңызды емес. Алайда қол тірегіш орнатылған болса, онда дискілерге арналған бос саңылаулар жинағын пайдаланыңыз.

2. Қарама-қарсы жақтағы адаптерді орнату үшін, осы қадамдарды қайталаңыз (48-сурет).

3. Құрылғыны кушетка бетіне адаптерлерін орнату ойықтарына сәйкестендіре отырып орнатыңыз. Құрылғыны бекітілгенше басыңыз.



47-сурет



48-сурет



49-сурет

# ТӨСЕМДІ ОРНАТУ

## RT-4527PETCT

### RT-4527EXA (50-сурет)

1. Адаптерді қол ұстағышына бекітіп тұрған 2 бұранданы босатып алыңыз.
2. Бұранда тесіктерін төсемдегі тесіктермен туралап, адаптер мен қол ұстағышының арасына төсем салыңыз.
3. Екі бұранданы қатайтылғанша қайта орнатыңыз.
4. Орнату нұсқауларын орындауды жалғастырыңыз.

### RT-4527LMI3 (51-сурет)

1. Адаптерді қол ұстағышына бекітіп тұрған 2 бұранданы босатып алыңыз.
2. Бұранда тесіктерін төсемдегі тесіктермен туралап, адаптер мен қол ұстағышының арасына төсем салыңыз.
3. Екі бұранданы қатайтылғанша қайта орнатыңыз.
4. Орнату нұсқауларын орындауды жалғастырыңыз.



50-сурет



51-сурет





[www.CQmedical.com](http://www.CQmedical.com)

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ [info@CQmedical.com](mailto:info@CQmedical.com)