
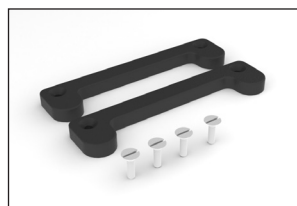
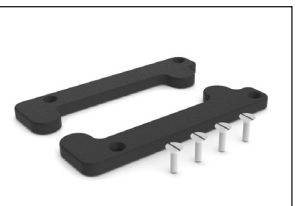
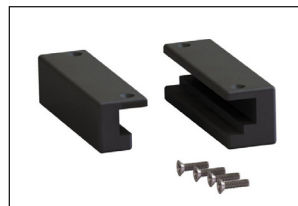
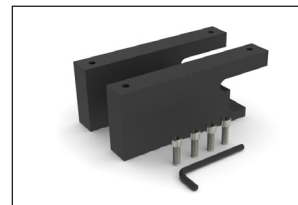
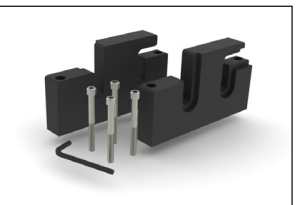
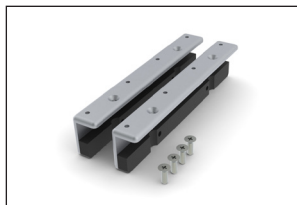
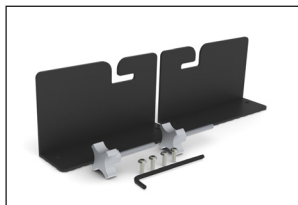
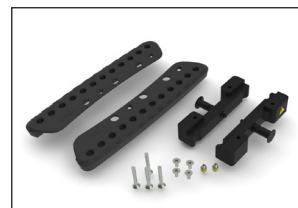
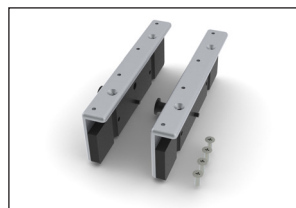
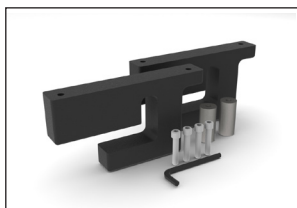


UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA UN LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Indeksēšanas adapteri

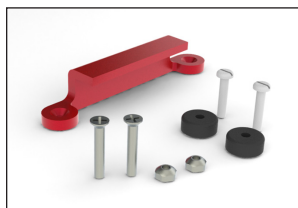

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass un Hand Grip Array ir Qfix preču zīmes.

Exact® un ETR® ir Varian Medical Systems reģistrētas preču zīmes.

Medical Intelligence I-Beam ir Elekta AB preču zīme, un Precise® ir Elekta AB reģistrēta preču zīme.

ZXT un TXT ir Siemens AG preču zīmes.

Med-Tec Prodigy un IPPS ir Civco Medical Solutions preču zīmes.

Gemini ir Philips Medical Systems preču zīme.

Discovery ir GE Medical preču zīme.

VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMU PAZIŅOJUMI

Simbolu un to skaidrojumu sarakstu skatiet vietnē CQmedical.com.

! BRĪDINĀJUMS ! NAV PIEĻAUJAMA NEKĀDA VEIDA APRĪKOJUMA PĀRVEIDOŠANA. JA JEBKURA ŠĪS IERĪCES DAĻA IR TIKUSI KATASTROFĀLI PĀRSLOGOTA, IZSKATĀS BOJĀTA VAI DARBOJAS NEPAREIZI, NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUCIET TĀS LIETOŠANU UN SAZINIETIES AR UZŅĒMUMU CQ MEDICAL PA TĀLRUNI +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 VAI E-PASTĀ SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

Adaptēri ir izstrādāti darbam ar Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, CURVE™ paneli un BoS™ galvgaļa rāmi.

BRĪDINĀJUMS PAR VISPĀRĒJU LIETOJUMU

Izmantojot šādus CT adapterus, ierīci NEDRĪKST bez balsta likt pār kušetes virsmas galu:


- RT-4527LTOMO (7. lpp.)
- RT-4529M (20. lpp.)
- RT-4527MTPCT (22. lpp.)
- RT-4527EXA475 (34. lpp.)
- RT-4527PETCT (36. lpp.)

Novietošana bez balsta pār kušetes virsmas galu var izraisīt ierīces nokrišanu no kušetes virsmas, fiziski traumējot pacientu.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527LMI3

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ UN TOMOTERAPIJAS ADAPTERIS

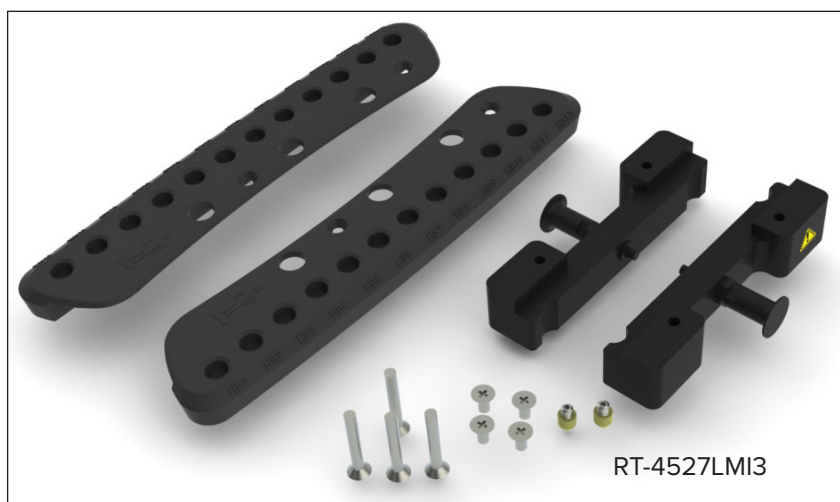

Nepieciešamie instrumenti: krusta skrūvgriezis



! BRĪDINĀJUMS ! JA VIRS BRĪDINĀJUMA LĪNIJAS TIEK PIELIKTS SPIEDIENS, JĀIEVĒRO PIESARDZĪBA, JO STARP IERĪCES ADAPTERI UN KUŠETES VIRSMU VAR IZVEIDOTIES IESPIEŠANAS PUNKTS.

4

UZSTĀDĪŠANAS CEĻVEDIS UN LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA – 2002950_IFU, Indexing Adapters_LV

CQ Medical | +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 | www.CQmedical.com

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527LMI3


! PIEZĪME ! Ja uzstādīšana tiek veikta uz 28 mm biezās ierīces, tādas kā Encompass™, pirms uzstādīšanas turpināšanas skatiet informāciju par starpliku uzstādīšanu 38. lappusē.

1. Uzstādiet adapterus uz katra roktura bloka Hand Grip Array, izmantojot 2 (katra), ¼-20 x 1 ½" skrūves (1. att.).
2. Uzstādiet dzelteni konusa pozicionēšanas adapteri tieši ierīces apakšā (uzstādiet vienu katrā pusē). (2. un 2a. att.)
3. Uzstādiet roktura blokus uz ierīces divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 (katra), ¼-20 x ½" skrūves. (3. att.)


! PIEZĪME ! Ja virs brīdinājuma līnijas tiek pielikts spiediens, starp ierīces adapteri un kušetes virsmu var izveidoties iespīšanas punkts.

! PIEZĪME ! Lai iegūtu papildinformāciju par roktura bloka Hand Grip Array instalēšanu, skatiet Hand Grip Array izstrādājuma ceļvedi un lietotāja rokasgrāmatu.


4. Pozicionējiet ierīci uz kušetes virsmas, salāgojot dzelteni konusu ar indeksēšanas atverēm uz kušetes virsmas. Pagrieziet un velciet virzuli, lai piestiprinātu ierīci pie kušetes virsmas/atbrīvotu no tās.

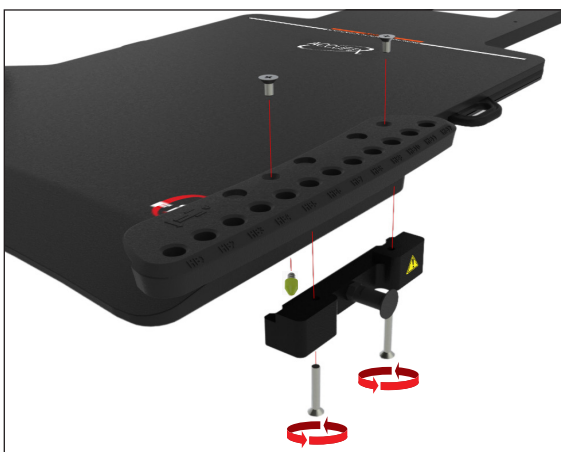


1. att.

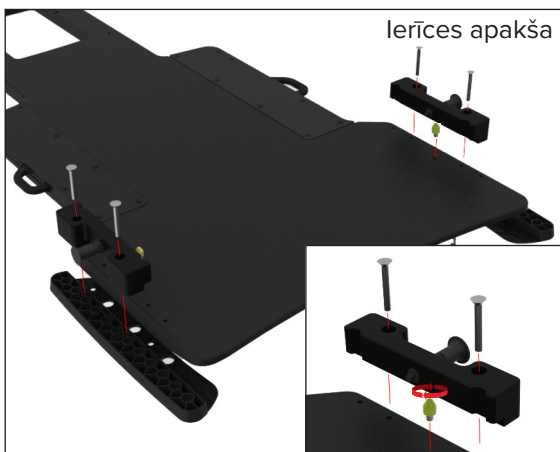

2. att.

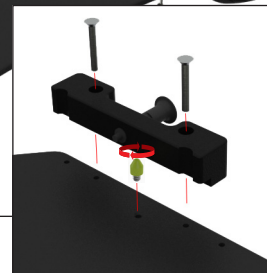

2a att.

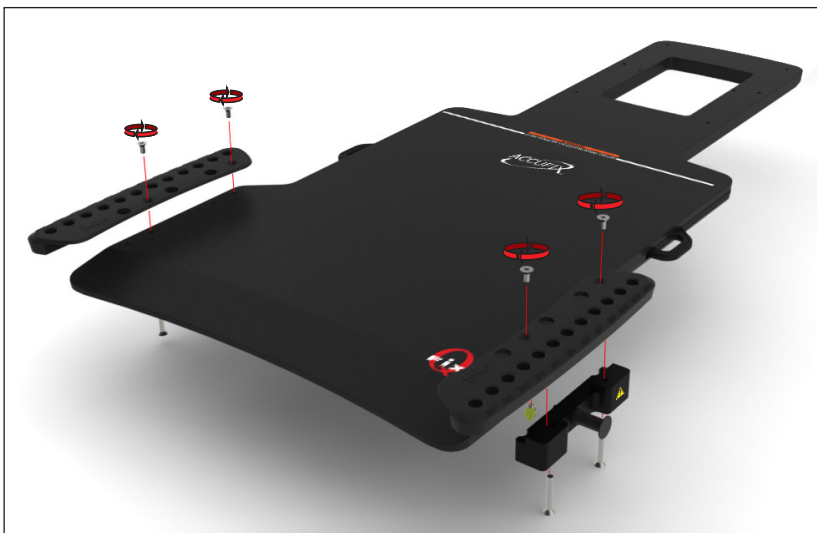

3. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527LTOMO




! BRĪDINĀJUMS! IZMANTOJOT ŠO ADAPTERI, IERĪCI *NEDRĪKST* NOVĒST BEZ BALSTA PĀR KUŠETES VIRSMAS GALU; TO DAROT, IERĪCE VAR NOKRIST NO KUŠETES VIRSMAS, FIZISKI TRAUMĒJOT PACIENTU.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527LTOMO

1. Uzstādiet dzelteno konusa pozicionēšanas adapteri tieši ierīces apakšā (uzstādiet vienu katrā pusē) (4. un 5. att.).
2. Pozicionējiet ierīci uz kušetes virsmas, salāgojot dzelteno konusu ar indeksēšanas atverēm uz kušetes virsmas.

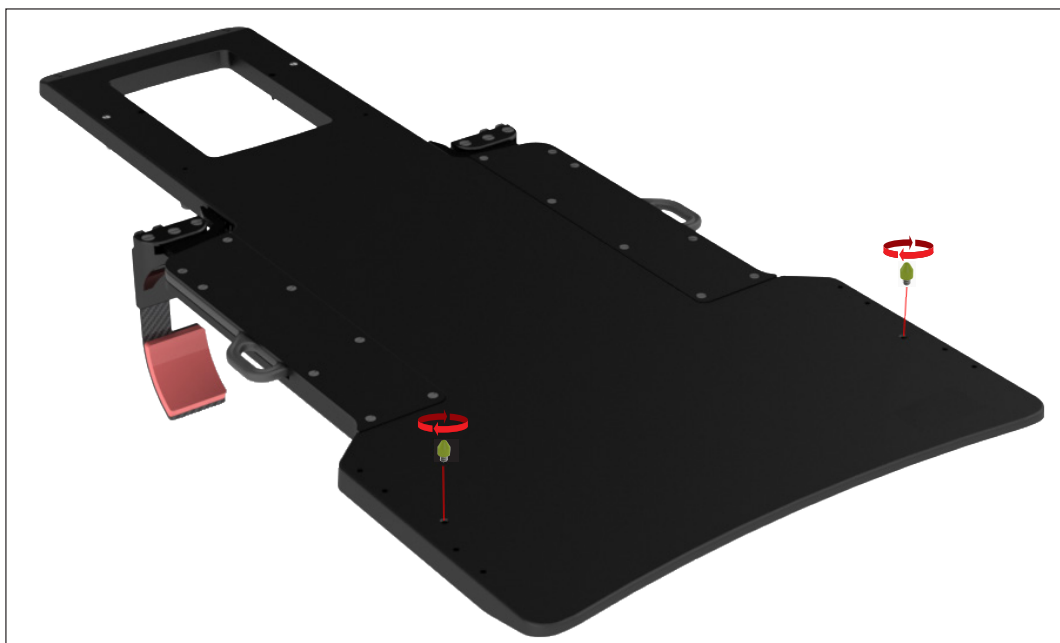

4. att.



5. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA


RT-4527MI

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ UN TOMOTERAPIJAS
ADAPTERIS



RT-4527MI

Tikai lietošanai ar
CURVE™ paneli

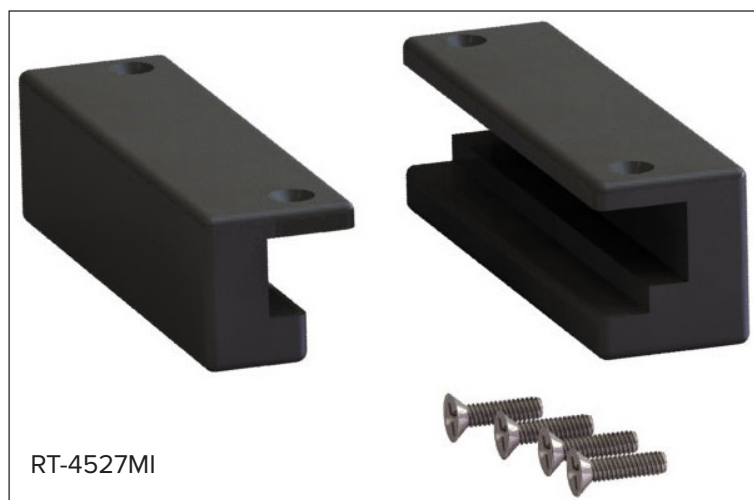

Nepieciešamie instrumenti: krusta skrūvgriezis


ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527MI


1. Uzstādiet pa vienam adapterim katrā ierīces pusē tādā stāvoklī, kāds parādīts zemāk, izmantojot 2 (katra), ¼-20 x ½" skrūves. (6. att.)

! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet adapterim pieejamo atveru kopumu.

2. Atkārtojiet uzstādīšanu pretējās puses adapterim (7. att.).
3. Novietojiet 2 tapu pozicionēšanas stieni vēlamajā pozīcijā (kad stienis būs piestiprināts, pozicionēšanas stienīta tapas salāgosies ar atverēm ierīces apakšā) (6., 7. un 8. att.).
4. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, vispirms pieāķējot pie kušetes virsmas lielāko no abiem adapteriem, pēc tam mazāko adapteri, un pozicionējiet ierīci, izmantojot 2 tapu pozicionēšanas stieni.

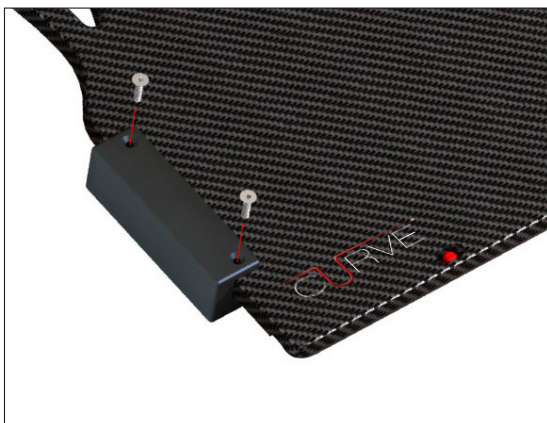

6. att.

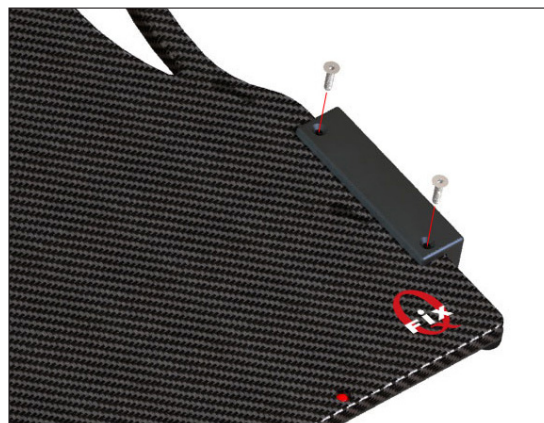

7. att.




8. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527EXAG

VARIAN EXACT® ADAPTERIS

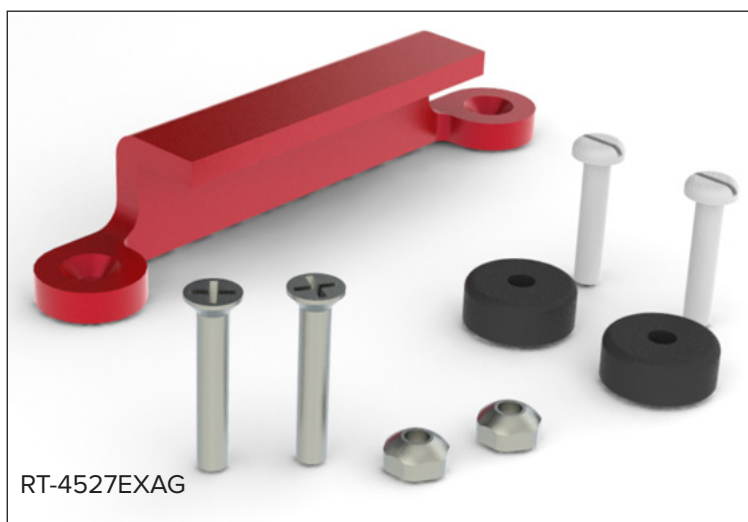

Nepieciešamie instrumenti: krusta un plakanais skrūvgriezis

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527EXAG


1. Uzstādiet sarkano adapteri uz ierīces divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x 1 ⅜" skrūves. Pēc tam uzskrūvējiet 2, ¼-20 aizsarguzgriežņus uz skrūvēm no ierīces augšpusē (9. att.).

! PIEZĪME ! Adapteri var uzstādīt gan ierīces labajā, gan kreisajā pusē. Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet adapterim pieejamo atveru kopumu.

2. Uzstādiet 2 pozicionēšanas diskus pozicionēšanas adaptera pretējā pusē attiecīgajās atverēs, izmantojot ¼-20 x 1 ¼" skrūves (katram 1) (10. att.).
3. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, pieāķējot sarkano adapteri vienā pusē, tad spiediet sānu ar pozicionēšanas diskus uz leju indeksēšanas ierobos, līdz ierīce turas stingri.



9. att.

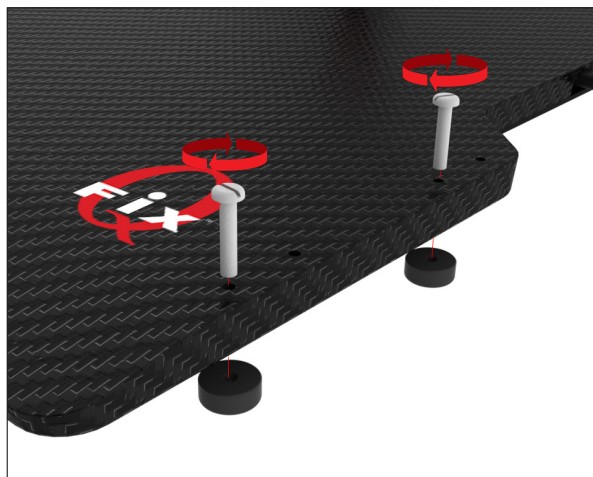

10. att.



11. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527QFIX

QFIX™ KVUE™ UN QUANTUM™ ADAPTERIS



Nepieciešamie instrumenti: krusta un plakanais skrūvgriezis

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527QFIX

1. Uzstādiet adapteri uz ierīces divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x ¾" skrūves. Adaptera daļai ar pārkari noteikti jābūt vērstai uz iekšpusi, lai tā varētu nofiksēties uz Qfix ierīces apmales (12. att.).


! PIEZĪME ! Adapteri var uzstādīt gan ierīces labajā, gan kreisajā pusē. Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet adapterim pieejamo atveru kopumu.

2. Uzstādiet 2 pozicionēšanas diskus pozicionēšanas adaptera pretējā pusē attiecīgajās atverēs, izmantojot ¼-20 x 1 ¼" skrūves (katram 1) (13. att.).

3. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, pieāķējot adapteri vienā kušetes virsmas pusē, tad spiediet sānu ar pozicionēšanas diskus uz leju indeksēšanas ierobos, līdz ierīce turas stingri.



12. att.

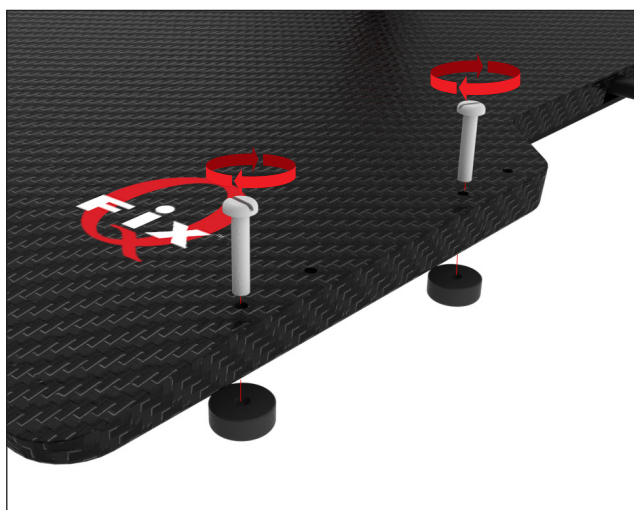

13. att.



14. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA


RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®



RT-4525L

RT-4527ELK

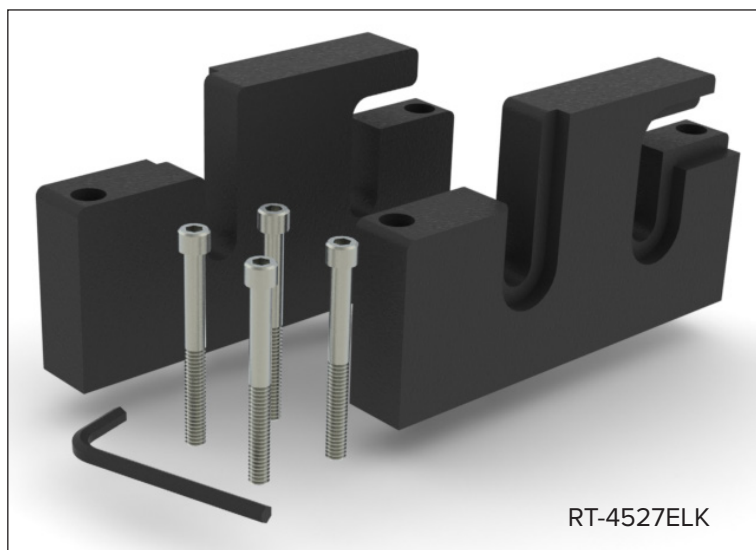

RT-4527ELK

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA


RT-4527ELK

1. Uzstādiet adapteri tā, lai gludā virsma būtu ierīces ārpusē un adapteris būtu zemāk parādītajā stāvoklī, divās atverēs, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x 2 ½" galvskrūves ar komplektā esošo sešstūra atslēgu (14. att.).


! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet adapterim pieejamo atveru kopumu.

2. Atkārtojiet uzstādīšanu pretējās puses adapterim, paturot adaptera gludo pusi vērstu uz āru (15. att.).

3. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, pieāķējot adapteri pie statīva uz piederumu sliedēm.

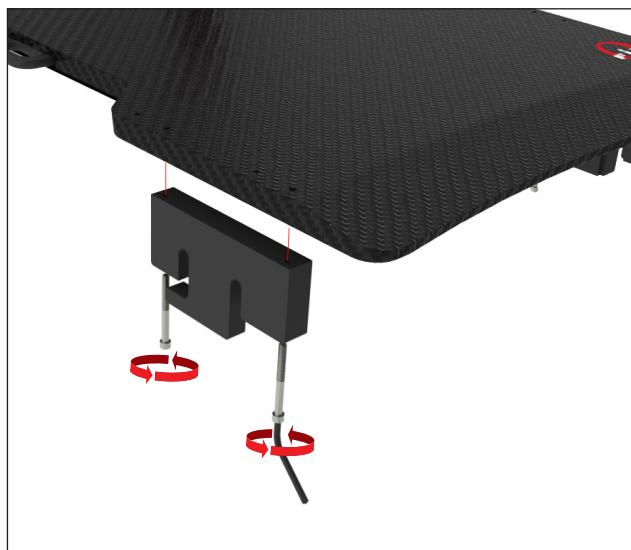

15. att.

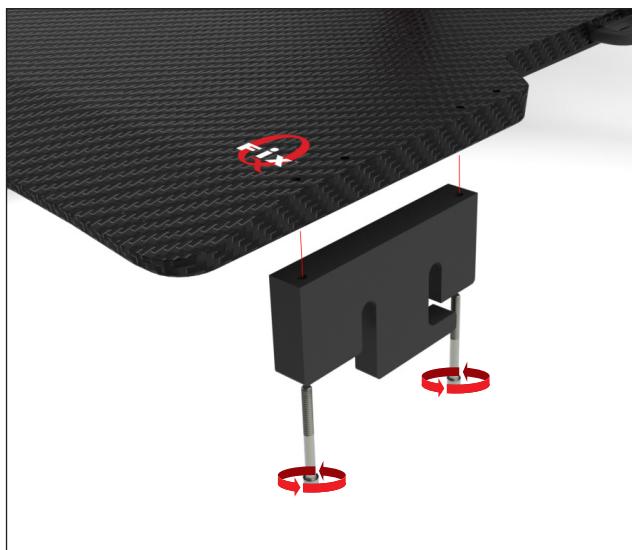

16. att.



17. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4529M

VARIAN EXACT®, SADERĪGS AR CT



RT-4525L

RT-4529M



RT-4529M

Nepieciešamie instrumenti: plakanais skrūvgriezis



IZMANTOJOT ŠO CT ADAPTERI, IERĪCI *NEDRĪKST* BEZ BALSTA LIKT PĀR KUŠETES VIRSMAS GALU. NOVIETOŠANA BEZ BALSTA PĀR KUŠETES VIRSMAS GALU VAR IZRAISĪT IERĪCES NOKRIŠANU NO KUŠETES VIRSMAS, FIZISKI TRAUMĒJOT PACIENTU.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA


RT-4529M

1. Uzstādiet 2 pozicionēšanas diskus abās ierīces pusēs divās atverēs, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot ¼-20 x 1 ¼" skrūves (katram 1) (17. att.).


! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet diskus pieejamo atveru kopumu.

2. Uzstādiet atlikušos 2 pozicionēšanas diskus pirmajiem diviem diskus pretējā pusē, attiecīgajās atverēs, izmantojot ¼-20 x 1 ¼" skrūves (katram 1) (18. att.).

3. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, salāgojot pozicionēšanas diskus ar indeksēšanas ierobiem. Spiediet ierīci uz leju, līdz tā turas stingri.

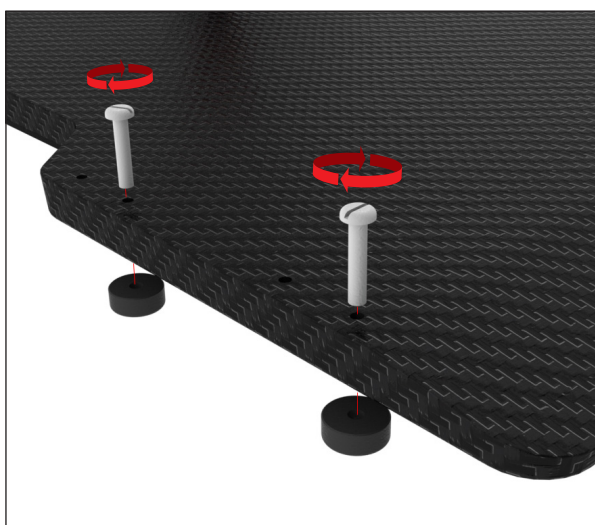

18. att.

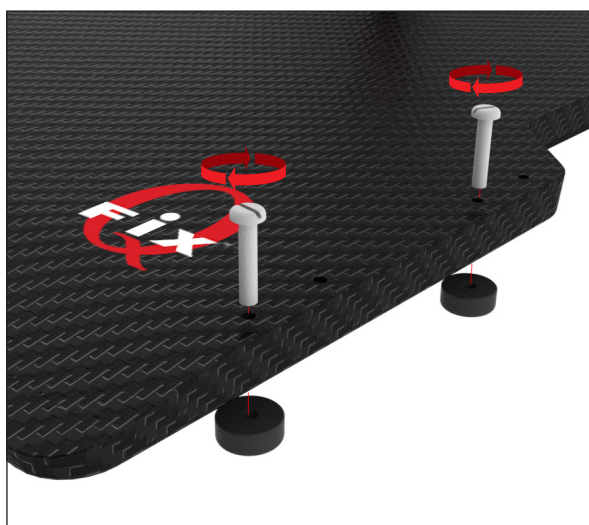

19. att.




20. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527MTPCT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ CT

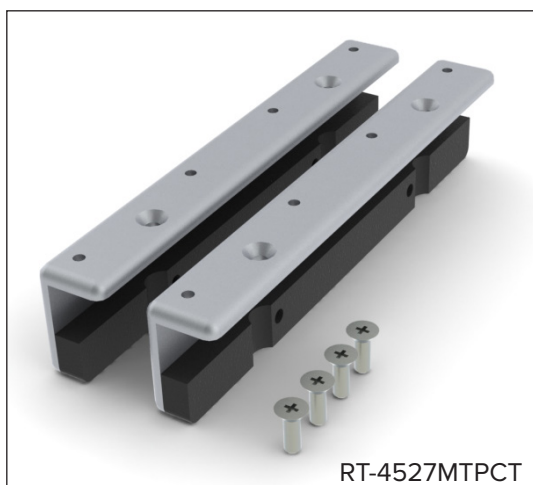

Nepieciešamie instrumenti: krusta
skrūvgriezis



IZMANTOJOT ŠO CT ADAPTERI, IERĪCI *NEDRĪKST* BEZ BALSTA LIKT PĀR KUŠETES VIRSMAS GALU. NOVIETOŠANA BEZ BALSTA PĀR KUŠETES VIRSMAS GALU VAR IZRAISĪT IERĪCES NOKRIŠANU NO KUŠETES VIRSMAS, FIZISKI TRAUMĒJOT PACIENTU.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA


RT-4527MTPCT

1. Uzstādiet adapteri zemāk parādītajā pozīcijā divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x ¾" skrūves (20. un 21. att.).


! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet adapterim pieejamo atveru kopumu.

2. Atkārtojiet uzstādīšanu pretējās puses adapterim, paturot adaptera gludo pusi vērstu uz āru.

3. Uzstādiet ierīci, salāgojot adapterus ar indeksāciju gar kušetes virsmas sānu. Spiediet ierīci uz leju, līdz tā turas stingri.

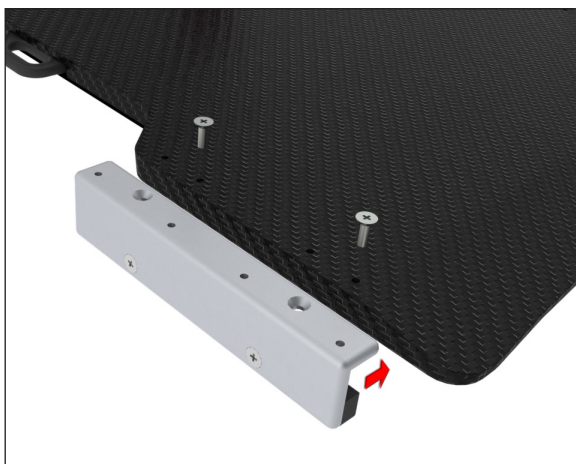

21. att.

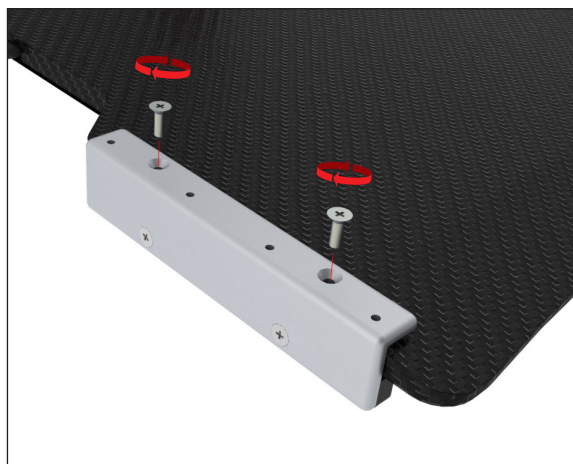

22. att.




23. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

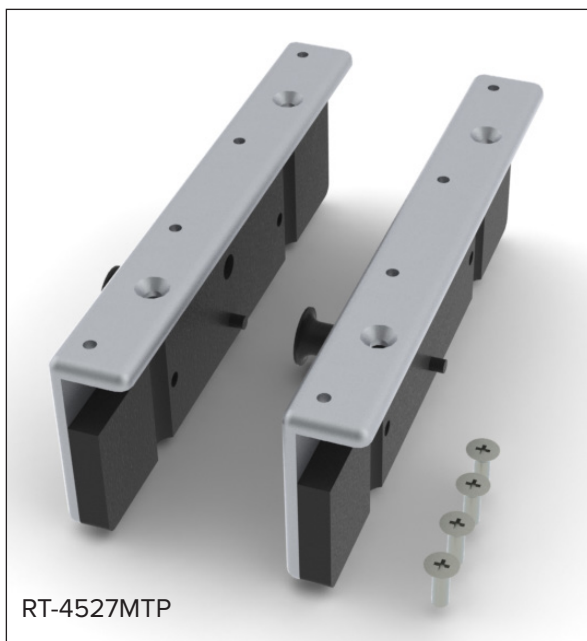

Nepieciešamie instrumenti: krusta
skrūvgriezis

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527MTP

1. Uzstādiet adapteri zemāk parādītajā pozīcijā divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x ¾" skrūves (24. un 25. att.).

! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet adapterim pieejamo atveru kopumu.

2. Atkārtojiet uzstādīšanu pretējās puses adapterim.

3. Uzstādiet ierīci, salāgojot adapterus ar indeksāciju gar kušetes virsmas sānu. Pagrieziet un velciet virzuli, lai piestiprinātu ierīci pie kušetes virsmas/atbrīvotu no tās.



24. att.



25. att.




26. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

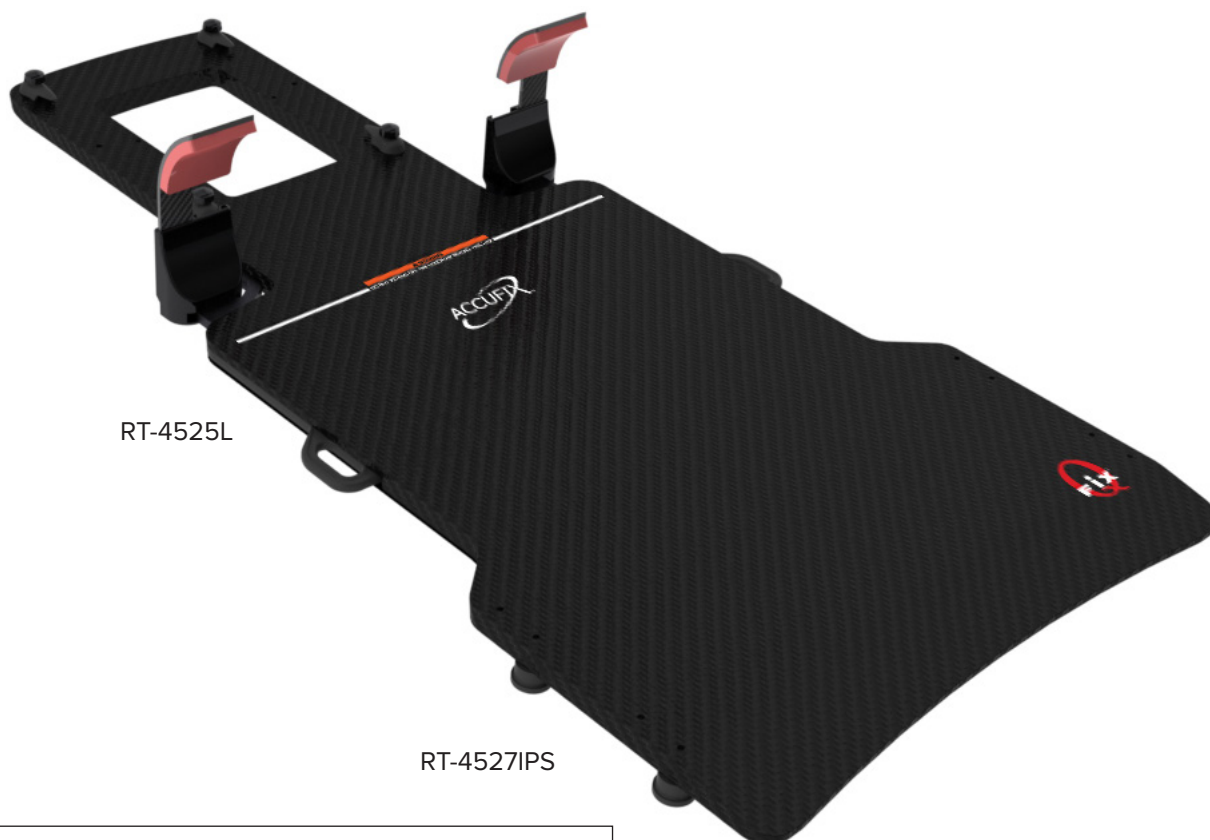

RT-4525L

RT-4527IPS



RT-4527IPS

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA


RT-4527IPS

1. Uzstādiet 2 pozicionēšanas diskus (ar apmali) abās ierīces pusēs divās atverēs, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot ¼- 20 x 1 ¼" skrūves (katram 1) (27. att.).


! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet diskus pieejamo atveru kopumu.

2. Uzstādiet atlikušos 2 pozicionēšanas diskus (bez apmales) pirmajiem diviem diskus pretējā pusē, attiecīgajās atverēs, izmantojot ¼-20 x 1 ¼" skrūves (katram 1) (28. att.).

3. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, salāgojot diskus ar indeksēšanas ierobiem, pēc tam vispirms pieāķējot pie kušetes virsmas diskus, kuriem ir apmale. Spiediet uz leju otrā pusē, līdz ierīce turas stingri.

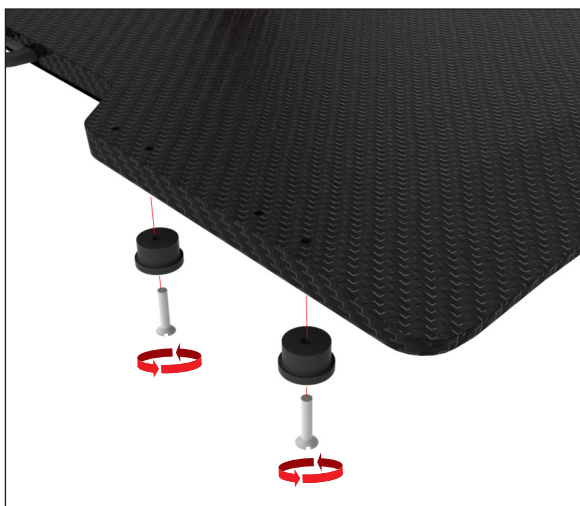

27. att.

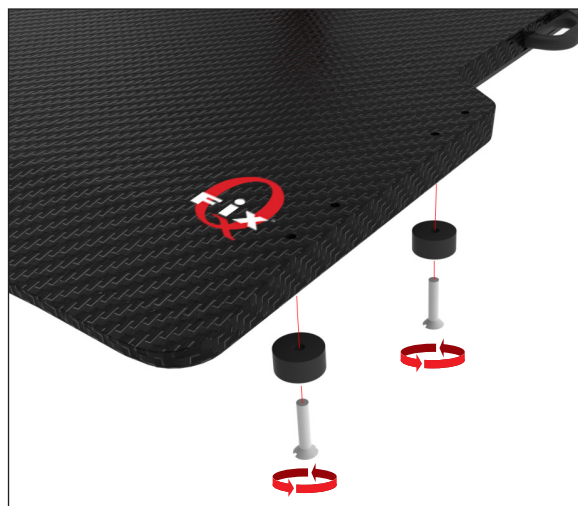

28. att.




29. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT

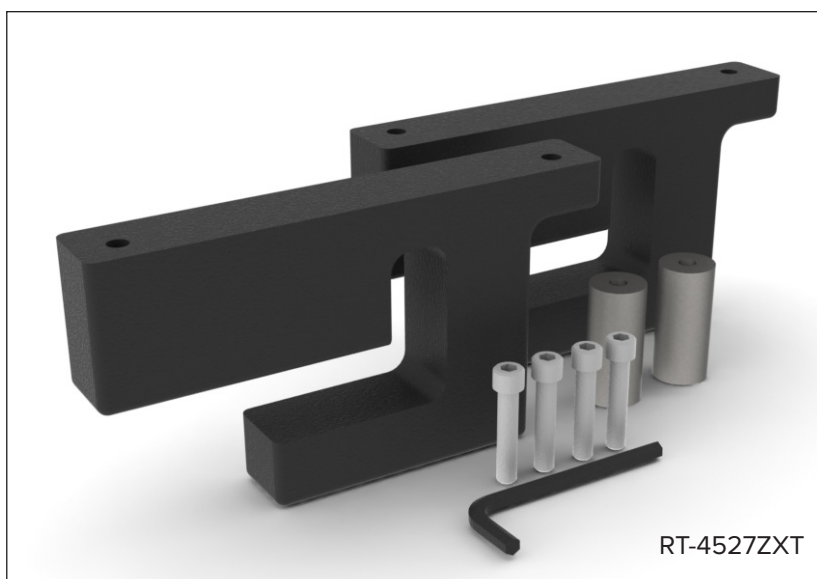

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527ZXT

1. Nomainiet kvadrāta stieņa statīvu uz ZXT kušetes ar komplektā esošo apaļā stieņa statīvu. (30. att.)
2. Uzstādiet adapteri zemāk parādītajā pozīcijā divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x 1 ¼" galvskrūves ar komplektā esošo sešstūra atslēgu (31. att.).

! PIEZĪME ! Ir labās puses un kreisās puses adapteris; pārliecinieties, ka pēc uzstādīšanas adapteris ir vienā līmenī ar ierīces sānu. (32. att.)

! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet diskus pieejamo atveru kopumu.


3. Atkārtējiet uzstādīšanu pretējās puses adapterim (33. att.).
4. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, pieāķējot adapteri pie statīva uz piederumu sliedēm (34. att.).




30. att.



31. att.

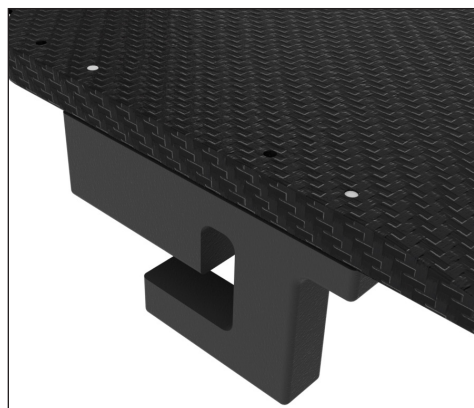

32. att.

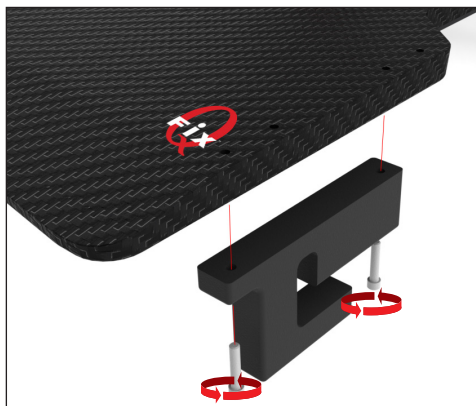

33. att.





34. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527SKD

SIEMENS KD

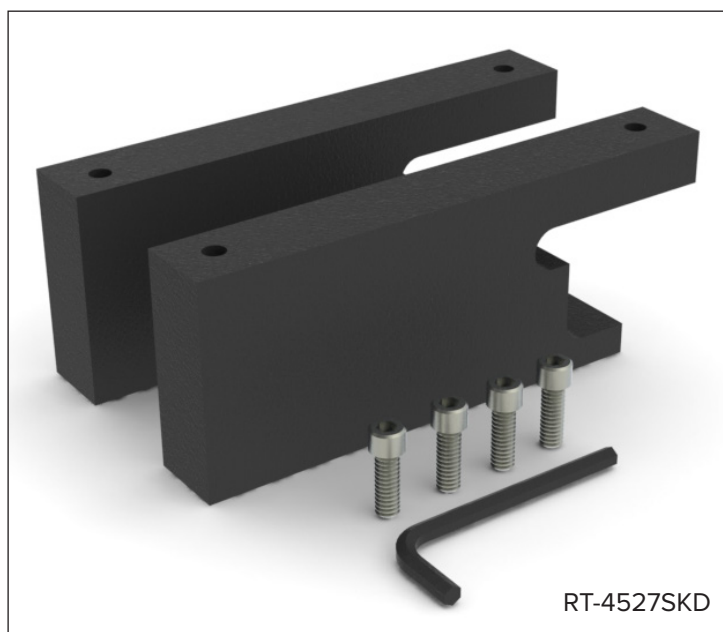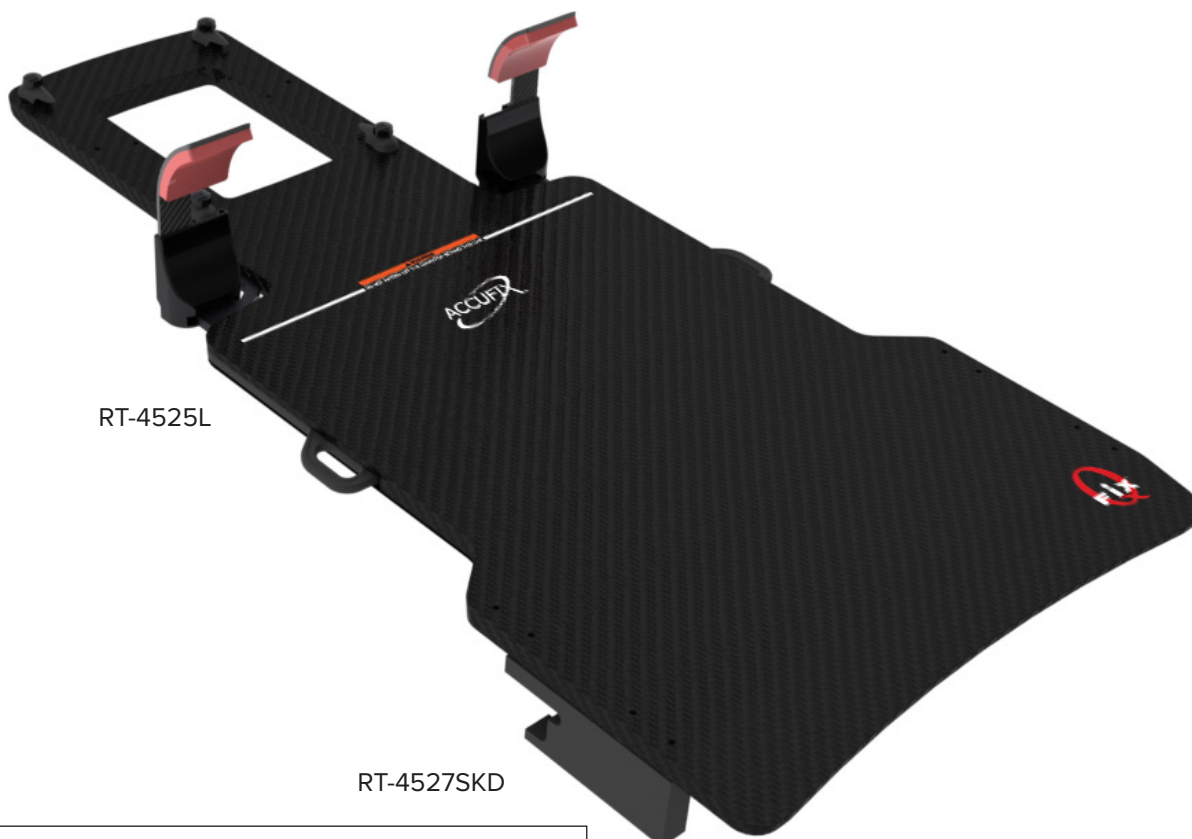

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527SKD


1. Uzstādiet adapteri zemāk parādītajā pozīcijā divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x ¾" galvskrūves ar komplektā esošo seštūra atslēgu (35. att.).

! PIEZĪME ! Ir labās puses un kreisās puses adapteris; pārliecinieties, ka pēc uzstādīšanas adapteris ir vienā līmenī ar ierīces sānu. (36. att.)


! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet diskus pieejamo atveru kopumu.

2. Atkārtojiet uzstādīšanu pretējās puses adapterim (37. att.).

3. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, pieāķējot adapteri pie statīva uz piederumu sliedēm.

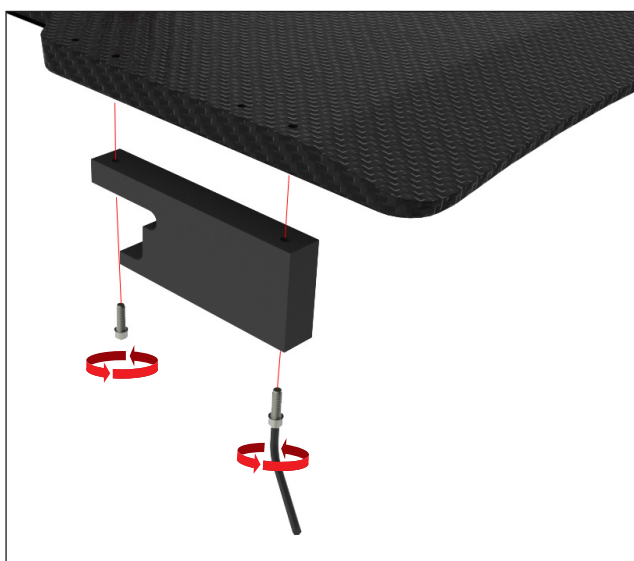

35. att.

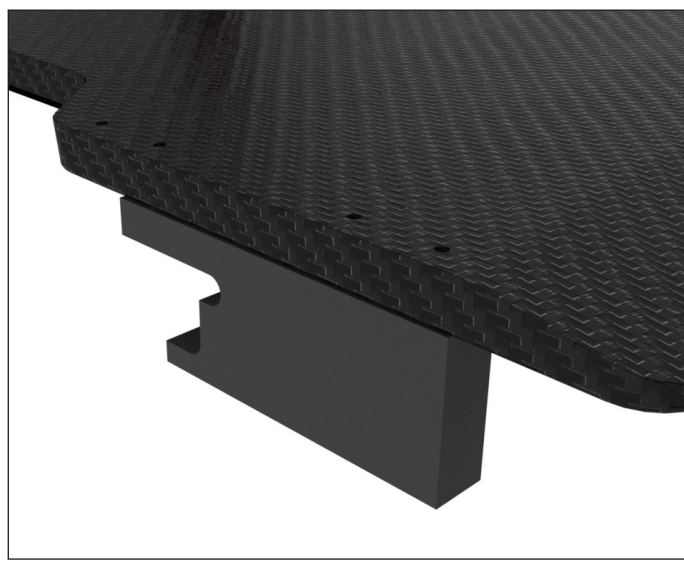

36. att.



37. att.




38. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527ETRJ

VARIAN ETR

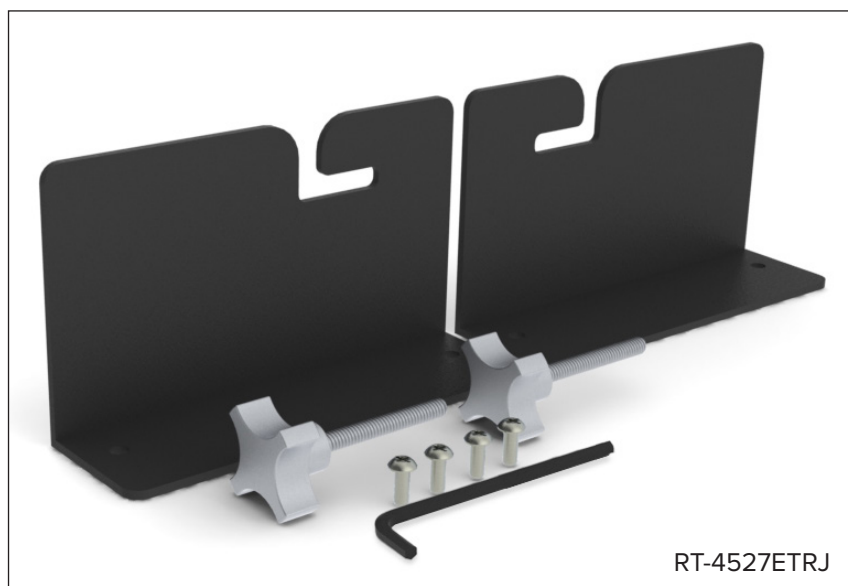

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527ETRJ


1. Izskrūvējiet trešo sešstūra skrūvi no ETR kušetes augšgala, izmantojot komplektā esošo sešstūra atslēgu. (39. att.)
 2. Atkārtojiet kušetes pretējā pusē.
 3. Nomainiet sešstūra skrūvi ar komplektā esošo grozāmpogu. Šai grozāmpogai jāpaliek kā pastāvīgai kušetes daļai. Pilnībā nepievelciet grozāmpogu; atstājiet apmēram 0,5 cm brīv kustības (40. att.).
 4. Atkārtojiet kušetes pretējā pusē.
 5. Uzstādiet adapteri zemāk parādītajā pozīcijā divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x ½" skrūves (41. att.).
- ! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet diskus pieejamo atveru kopumu.**
6. Atkārtojiet uzstādīšanu pretējās puses adapterim (42. att.).
 7. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, pieāķējot adapteri pie grozāmpogas ass. Pievelciet grozāmpogu, lai nostiprinātu. (43. att.)




39. att.




40. att.

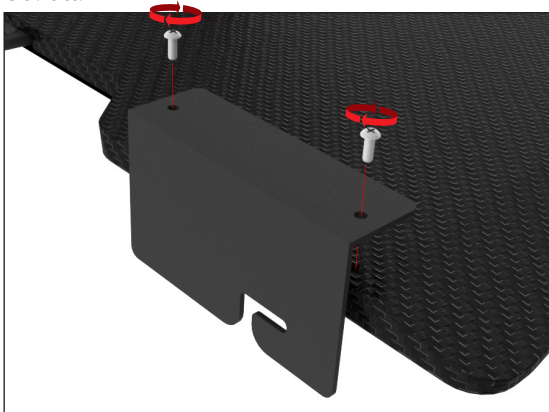

41. att.

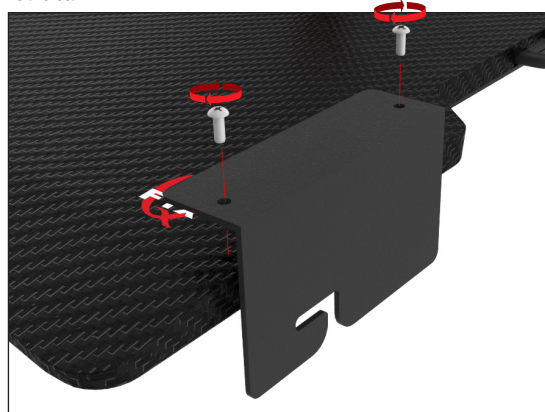

42. att.

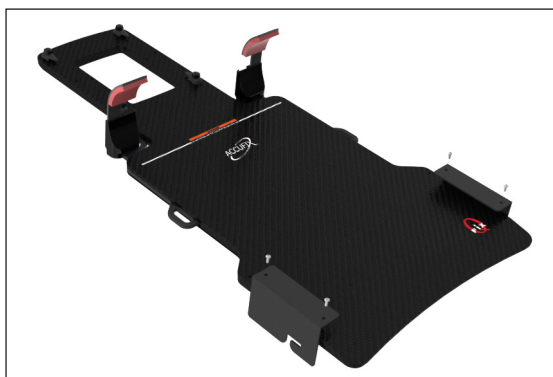


43. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527EXA475

ŠAURA STILA EXACT®, 500 MM PLATA, INDEKSĒTA CT
PĀRKLĀJPLĀKSNE

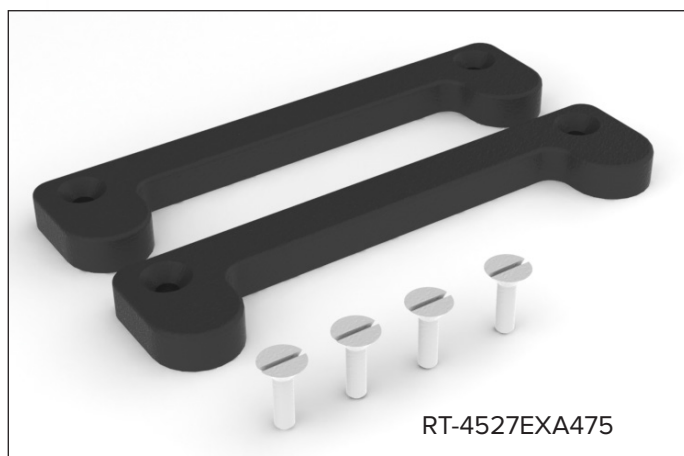

Nepieciešamie instrumenti: plakanais skrūvgriezis



IZMANTOJOT ŠO CT ADAPTERI, IERĪCI *NEDRĪKST* BEZ BALSTA LIKT PĀR KUŠETES VIRSMAS GALU. NOVIETOŠANA BEZ BALSTA PĀR KUŠETES VIRSMAS GALU VAR IZRAISĪT IERĪCES NOKRIŠANU NO KUŠETES VIRSMAS, FIZISKI TRAUMĒJOT PACIENTU.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527EXA475

1. Uzstādiet adapteri zemāk parādītajā pozīcijā divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x ¾" skrūves (44. att.).

! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet diskus pieejamo atveru kopumu.

2. Atkārtojiet uzstādīšanu pretējās puses adapterim (45. att.).

3. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, salāgojot adapterus ar indeksēšanas ierobiem. Spiediet ierīci uz leju, līdz tā turas stingri.



44. att.



45. att.




46. att.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527PETCT

PHILIPS GEMINI™ UN GE DISCOVERY™ LS 480 MM PLATA PET/CT
PĀRKLĀJPLĀKSNE

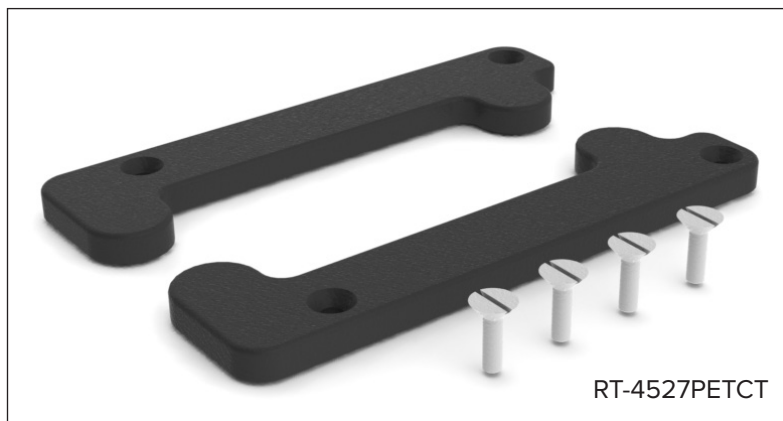

Nepieciešamie instrumenti: plakanais skrūvgriezis



IZMANTOJOT ŠO CT ADAPTERI, IERĪCI *NEDRĪKST* BEZ BALSTA LIKT PĀR KUŠETES VIRSMAS GALU. NOVIETOŠANA BEZ BALSTA PĀR KUŠETES VIRSMAS GALU VAR IZRAISĪT IERĪCES NOKRIŠANU NO KUŠETES VIRSMAS, FIZISKI TRAUMĒJOT PACIENTU.

ADAPTERA UZSTĀDĪŠANA

RT-4527PETCT

1. Uzstādiet adapteri zemāk parādītajā pozīcijā divās no atverēm, kas izvietotas 140 mm (5,5") atstatumā viena no otras, izmantojot 2 ¼-20 x ¾" skrūves (47. att.).


! PIEZĪME ! Nav svarīgi, kurš atveru kopums tiek izmantots, tomēr, ja ir uzstādīts roktura bloks Hand Grip Array, lietojiet diskus pieejamo atveru kopumu.

2. Atkārtējiet uzstādīšanu pretējās puses adapterim (48. att.).

3. Uzstādiet ierīci uz kušetes virsmas, salāgojot adapterus ar indeksēšanas ierobiem. Spiediet ierīci uz leju, līdz tā turas stingri.



47. att.

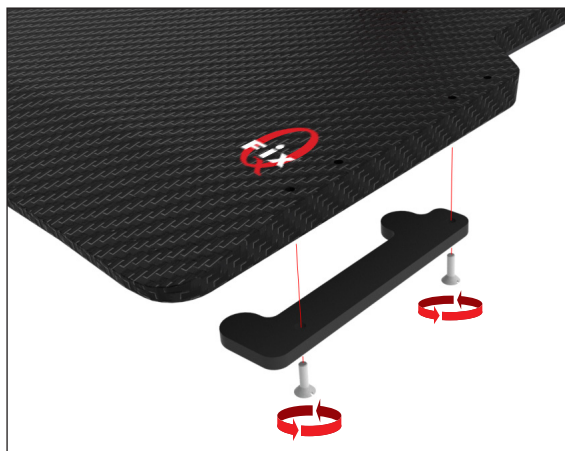

48. att.



49. att.

STARPLIKAS UZSTĀDĪŠANA

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (50. att.)

1. Izskrūvējiet 2 skrūves, ar kurām adapteris ir piestiprināts pie roktura bloka Hand Grip Array.
2. Ievietojiet starpliku starp adapteri un roktura bloku Hand Grip Array, salāgojot skrūvju atveres ar starplikas atverēm.
3. Stingri ieskrūvējiet atpakaļ abas skrūves.
4. Turpiniet izpildīt uzstādīšanas norādījumus.

RT-4527LMI3 (51. att.)

1. Izskrūvējiet 2 skrūves, ar kurām adapteris ir piestiprināts pie roktura bloka Hand Grip Array.
2. Ievietojiet starpliku starp adapteri un roktura bloku Hand Grip Array, salāgojot skrūvju atveres ar starplikas atverēm.
3. Stingri ieskrūvējiet atpakaļ abas skrūves.
4. Turpiniet izpildīt uzstādīšanas norādījumus.



50. att.



51. att.



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com