
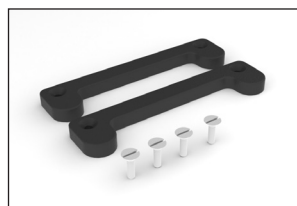
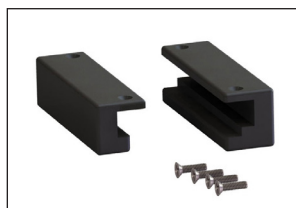
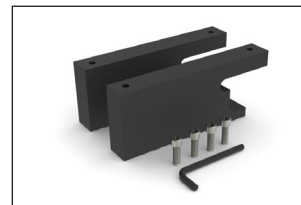
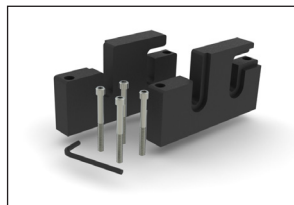
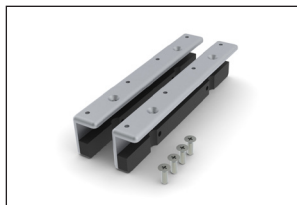
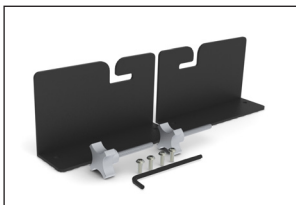
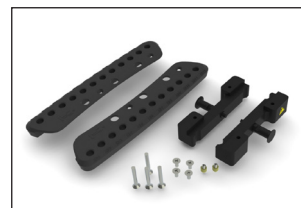
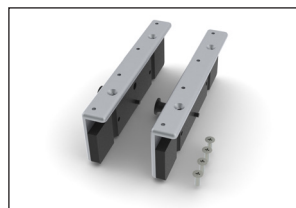
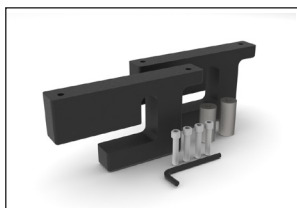


GHID DE INSTALARE ȘI MANUAL DE UTILIZARE

Adaptoare de indexare

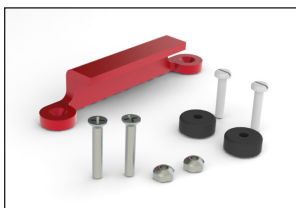

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass și Hand Grip Array sunt mărci comerciale ale Qfix.

Exact® și ETR® sunt mărci comerciale înregistrate ale Varian Medical Systems.

Medical Intelligence I-Beam este o marcă comercială, iar Precise® este o marcă comercială înregistrată a Elekta AB.

ZXT și TXT sunt mărci comerciale ale Siemens AG.

Med-Tec Prodigy și IPPS sunt mărci comerciale ale Civco Medical Solutions.

Gemini este o marcă comercială a Philips Medical Systems.

Discovery este o marcă comercială a GE Medical.

MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE

DECLARAȚII DE AVERTIZARE

Pentru o listă a simbolurilor și definițiile aferente acestora, consultați CQmedical.com.

! AVERTISMENT ! NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT. DACĂ ORICARE DINTRE COMPONENTELE ACESTUI DISPOZITIV ESTE SUPUSĂ LA O SARCINĂ EXTREM DE MARE, ESTE DETERIORATĂ SAU FUNCȚIONEAZĂ INADECVAT, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ȘI CONTACTAȚI CQ MEDICAL LA +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 SAU LA SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

Adaptoarele sunt proiectate pentru a funcționa cu Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, CURVE™ Board și BoS™ Headframe.

AVERTISMENT DE UTILIZARE GENERALĂ


Dispozitivul NU trebuie să fie fixat în consolă peste extremitatea blatului mesei atunci când se utilizează următoarele adaptoare CT:

- RT-4527LTOMO (pag. 7)
- RT-4529M (pag. 20)
- RT-4527MTPCT (pag. 22)
- RT-4527EXA475 (pag. 34)
- RT-4527PETCT (pag. 36)

Depășirea extremității blatului mesei poate cauza căderea dispozitivului de pe blatul mesei, rănind pacientul.

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527LMI3

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ ȘI ADAPTORUL
PENTRU TOMOTERAPIE

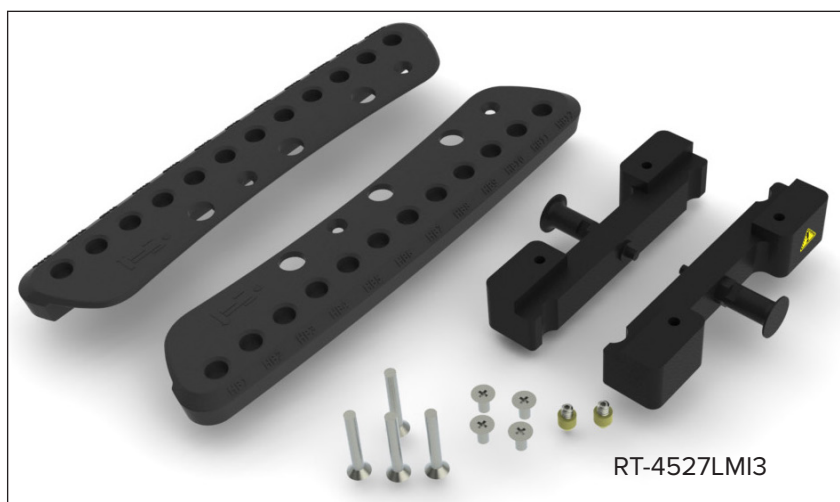

Instrumente necesare: Șurubelniță cu cap în cruce



! AVERTISMENT ! PROCEDAȚI CU ATENȚIE ÎNTRUCÂT ÎNTRE ADAPTORUL DISPOZITIVULUI ȘI BLATUL MESEI POATE APĂREA UN PUNCT DE PRINDERE ATUNCI CÂND PRESIUNEA ESTE APLICATĂ PESTE LINIA DE AVERTIZARE.

4

GHIDUL DE INSTALARE ȘI MANUALUL DE UTILIZARE – 2002950_IFU, Indexing Adapters_RO

CQ Medical | +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 | www.CQmedical.com

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527LMI3

! NOTĂ ! Dacă instalați pe un dispozitiv cu grosimea de 28 mm, cum ar fi Encompass™, consultați pagina 38 pentru instalarea elementelor de fixare înainte de a continua configurarea.

1. Instalați adaptoarele pe fiecare element structural pentru mâner folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 1 1/2" (pentru fiecare) (Fig. 1).
2. Instalați adaptorul de localizare cu con galben direct pe partea inferioară a dispozitivului (instalați unul pe fiecare parte). (Fig. 2 și 2a)
3. Instalați elementele structurale pentru mâner pe dispozitiv, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5"), folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 1/2" (pentru fiecare). (Fig. 3)

! NOTĂ ! Între adaptorul dispozitivului și blatul mesei poate apărea un punct de prindere atunci când presiunea este aplicată peste linia de avertizare.

! NOTĂ ! Pentru mai multe informații despre instalarea elementelor structurale pentru mânere, consultați Ghidul produsului și Manualul de utilizare pentru elementele structurale pentru mânere.

4. Amplasați dispozitivul pe blatul mesei prin alinierea conului galben cu orificiile de indexare de pe suprafața superioară a blatului mesei. Răsuciți și trageți pistonul pentru a atașa/elibera dispozitivul pe blatul mesei.

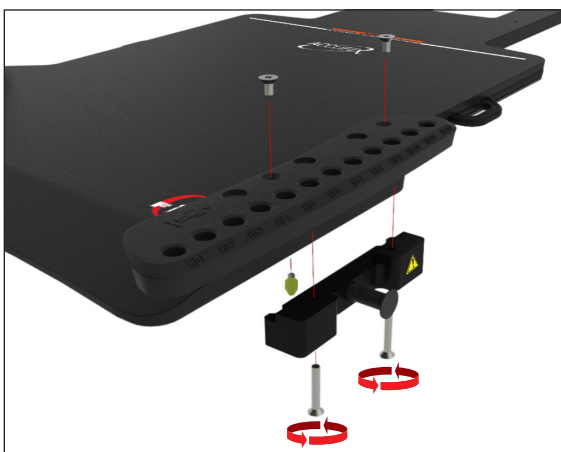


Fig. 1

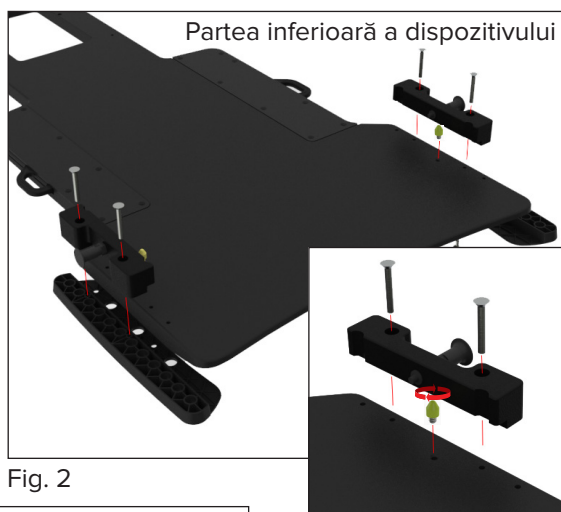


Fig. 2

Fig. 2a

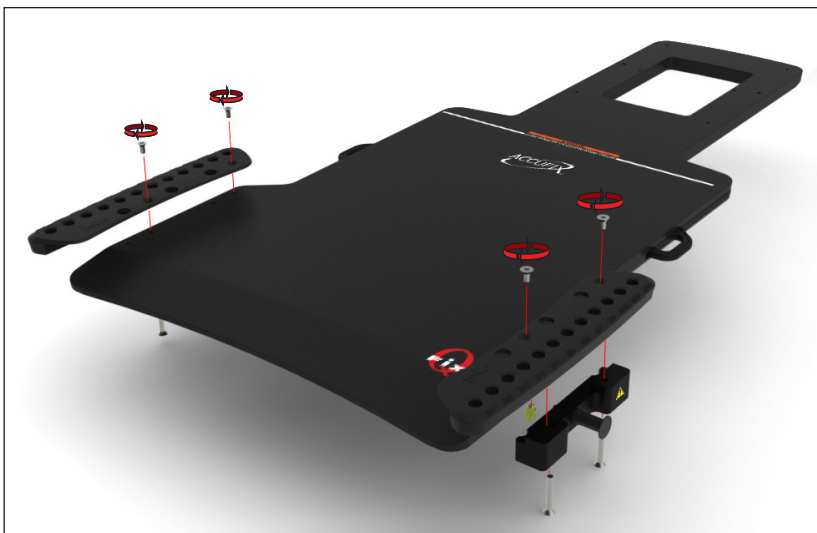


Fig. 3

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527LTOMO



! AVERTISMENT ! DISPOZITIVUL *NU* TREBUIE SĂ FIE SUSPENDAT PESTE EXTREMITATEA BLATULUI MESEI ATUNCI CÂND UTILIZAȚI ACEST ADAPTOR; ÎN CAZ CONTRAR, DISPOZITIVUL POATE CĂDEA DE PE BLATUL MESEI, RĂNIND PACIENTUL.

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527LTOMO

1. Instalați adaptorul de localizare cu con galben direct pe partea inferioară a dispozitivului (instalați unul pe fiecare parte) (Fig. 4 și 5).
2. Amplasați dispozitivul pe blatul mesei prin alinierea conului galben cu orificiile de indexare de pe suprafața superioară a blatului mesei.

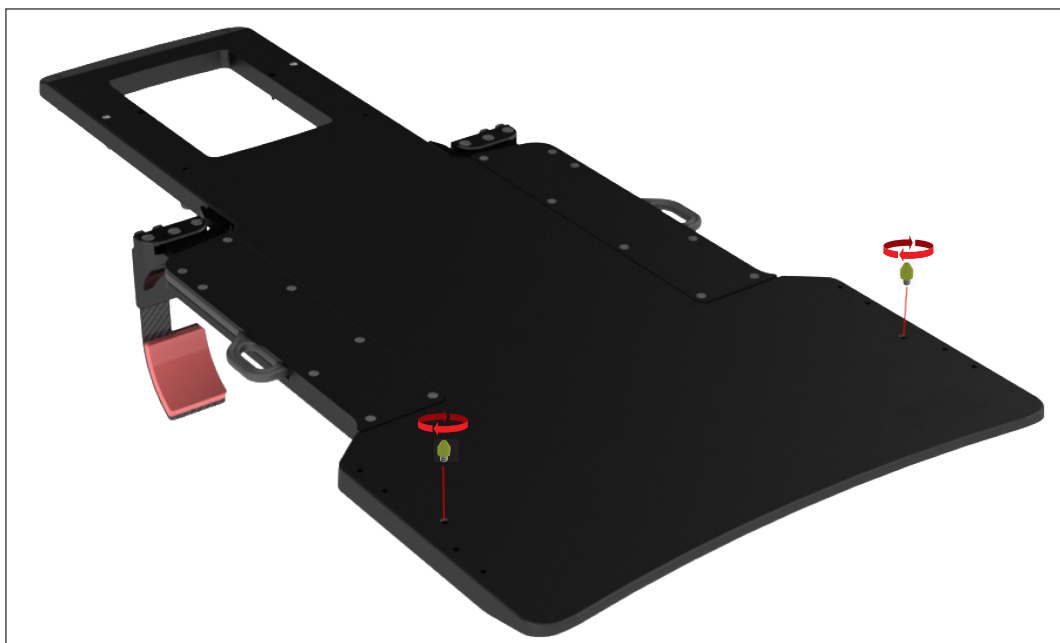



Fig. 4



Fig. 5

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527MI

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ ȘI ADAPTORUL
PENTRU TOMOTERAPIE

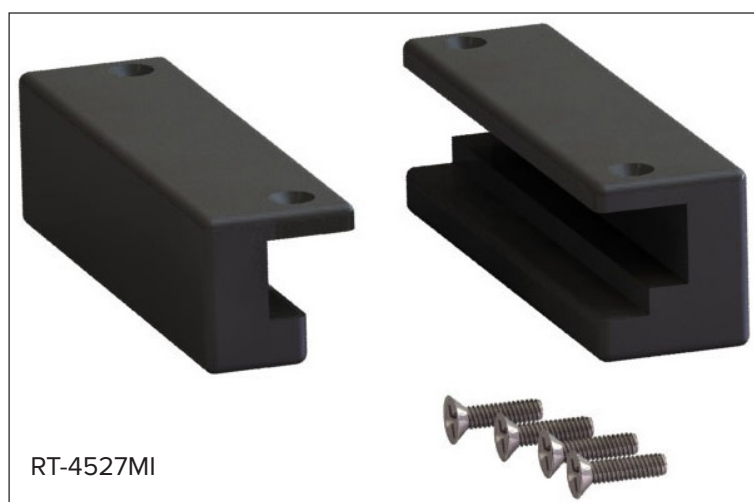

Instrumente necesare: Șurubelniță cu cap în cruce

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527MI

1. Instalați oricare dintre adaptoare pe o parte a dispozitivului în poziția prezentată mai jos, folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 1/2" (pentru fiecare). (Fig. 6)

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru adaptor.

2. Repetați instalarea pentru adaptorul opus (Fig. 7).

3. Amplasați bara de localizare cu 2 pini în poziția dorită (odată atașată, pinii barei de localizare se vor alinia cu orificiile din partea inferioară a dispozitivului) (Fig. 6, 7 și 8).

4. Instalați dispozitivul pe blatul mesei, cuplând mai întâi cel mai mare dintre cele două adaptoare pe blatul mesei, apoi adaptorul mai mic, și amplasați dispozitivul utilizând bara de localizare cu 2 pini.

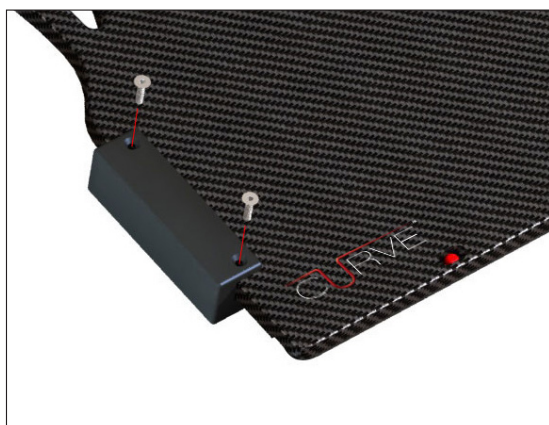


Fig. 6

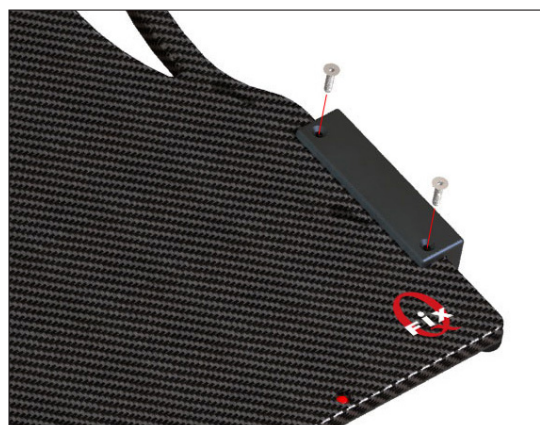



Fig. 7



Fig. 8

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527EXAG

ADAPTORUL VARIAN EXACT®

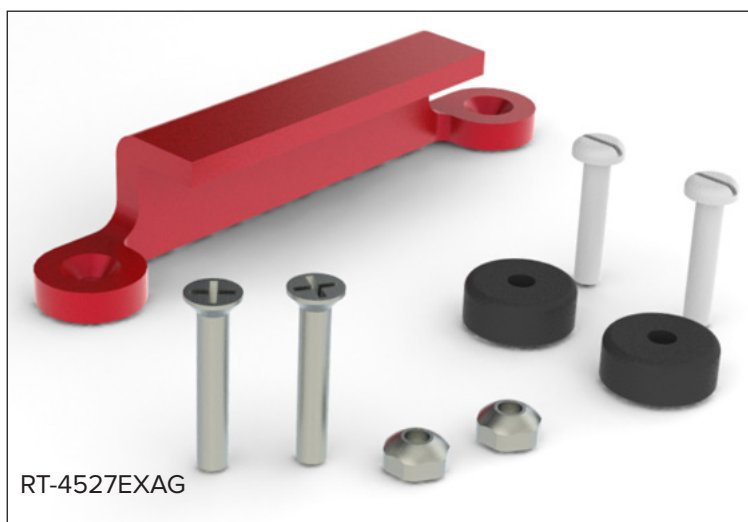

Instrumente necesare: Șurubelniță în cruce și șurubelniță cu cap plat

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527EXAG

1. Instalați adaptorul roșu pe dispozitiv, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 1 3/8”. Apoi fixați cele 2 piulițe de siguranță 1/4-20 pe șuruburile din partea superioară a dispozitivului (Fig. 9).

! NOTĂ ! Adaptorul poate fi instalat fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă a dispozitivului. Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru adaptor.

2. Instalați 2 discuri de localizare pe partea opusă a adaptorului de localizare, în orificiile corespunzătoare, folosind șuruburi 1/4-20 x 1 1/4” (1 pentru fiecare) (Fig. 10).

3. Instalați dispozitivul pe blatul mesei prin prinderea adaptorului roșu pe o parte, apoi împingeți partea cu discurile de localizare în jos în canelurile de indexare până când este fixată.



Fig. 9

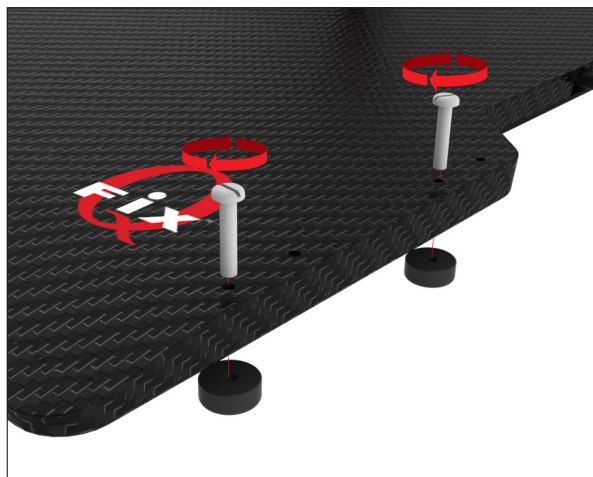


Fig. 10



Fig. 11

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527QFIX

ADAPTORUL QFIX™ KVUE™ ȘI QUANTUM™



Instrumente necesare: Șurubelniță în cruce și șurubelniță cu cap plat

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527QFIX

1. Instalați adaptorul pe dispozitiv, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 3/4”. Asigurați-vă că partea adaptorului cu consola este orientată spre interior, astfel încât să se poată fixa pe marginea dispozitivului Qfix (Fig. 12).

! NOTĂ ! Adaptorul poate fi instalat fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă a dispozitivului. Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru adaptor.

2. Instalați 2 discuri de localizare pe partea opusă a adaptorului de localizare, în orificiile corespunzătoare, folosind șuruburi 1/4-20 x 1 1/4” (1 pentru fiecare) (Fig. 13).

3. Instalați dispozitivul pe blatul mesei prin agățarea adaptorului pe o parte a blatului mesei, apoi împingeți partea cu discurile de localizare în jos în canelurile de indexare până când este fixat.



Fig. 12

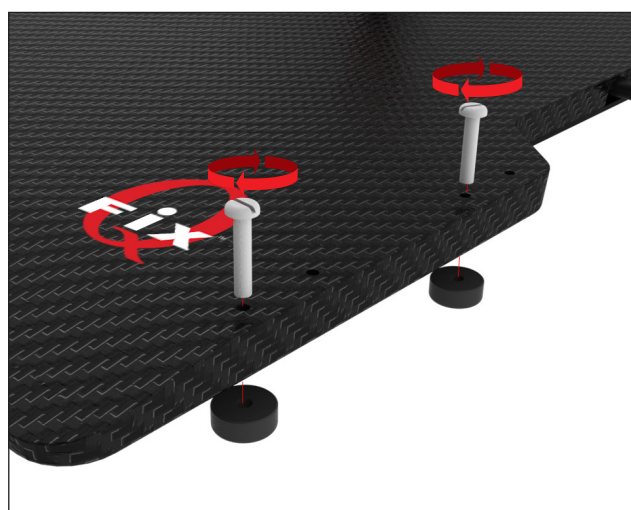



Fig. 13



Fig. 14

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

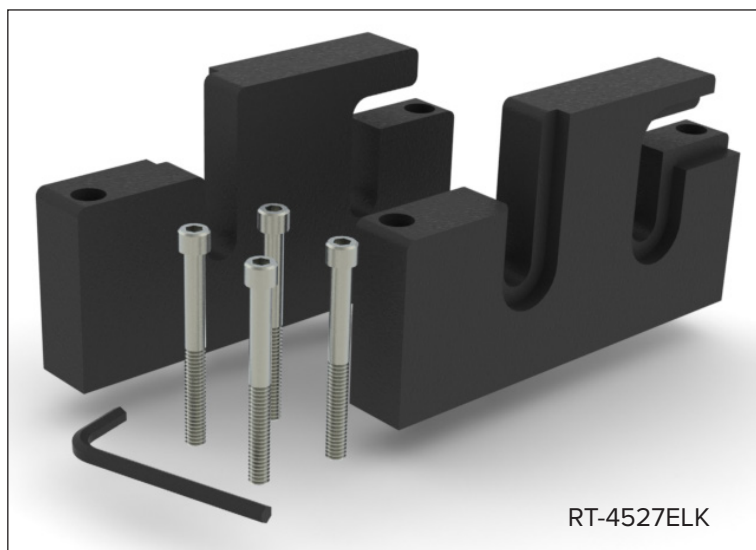

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527ELK

1. Instalați adaptorul astfel încât suprafața netedă să fie în exteriorul dispozitivului, iar adaptorul să fie în poziția prezentată mai jos, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi cu cap de 1/4-20 x 2 1/2” cu cheia hexagonală furnizată (Fig. 14).

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru adaptor.

2. Repetați instalarea pentru adaptorul opus, menținând partea netedă a adaptorului orientată spre exterior (Fig. 15).
3. Instalați dispozitivul pe blatul mesei, agățând adaptorul pe montantul de pe șinele de accesorii.

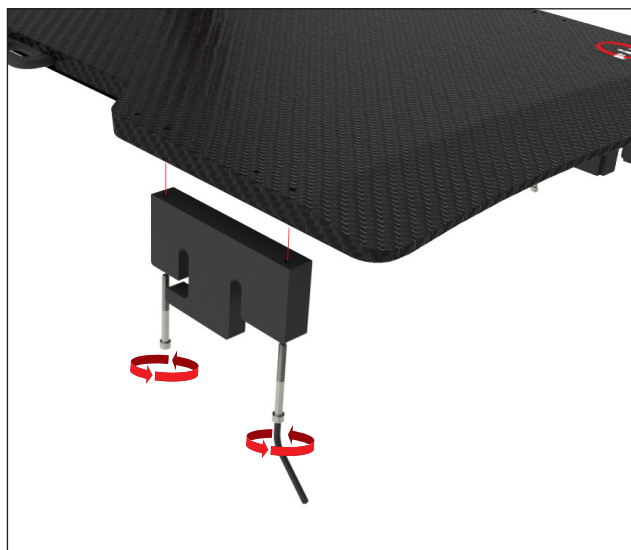


Fig. 15

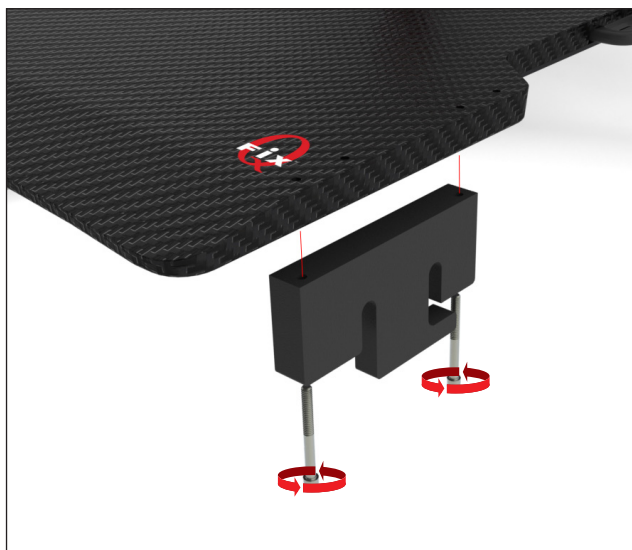


Fig. 16



Fig. 17

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4529M

VARIAN EXACT® COMPATIBIL CU MEDIILE CT



Instrumente necesare: Șurubelniță cu cap plat



DISPOZITIVUL *NU TREBUIE* SĂ FIE FIXAT ÎN CONSOLĂ PESTE CAPĂȚUL BLATULUI MESEI ATUNCI CÂND SE UTILIZEAZĂ ACEST ADAPTOR CT. DEPĂȘIREA EXTREMITĂȚII BLATULUI MESEI POATE CAUZA CĂDEREA DISPOZITIVULUI DE PE BLATUL MESEI, RĂNIND PACIENTUL.

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4529M

1. Instalați 2 discuri de localizare pe fiecare parte a dispozitivului, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind șuruburi 1/4-20 x 1 1/4” (1 pentru fiecare) (Fig. 17).

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru discuri.

2. Instalați celelalte 2 discuri de localizare pe partea opusă față de primele două discuri, în orificiile corespunzătoare, folosind șuruburi 1/4-20 x 1 1/4” (1 pentru fiecare) (Fig. 18).

3. Instalați dispozitivul pe blatul mesei, aliniind discurile de localizare cu canelurile de indexare. Apăsați în jos dispozitivul până când este fixat.

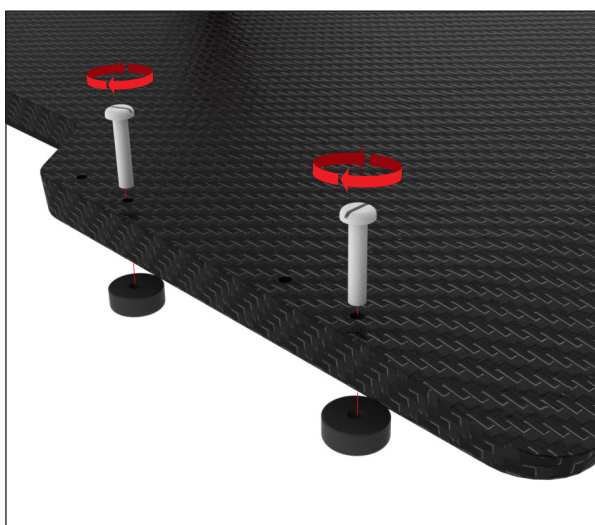


Fig. 18

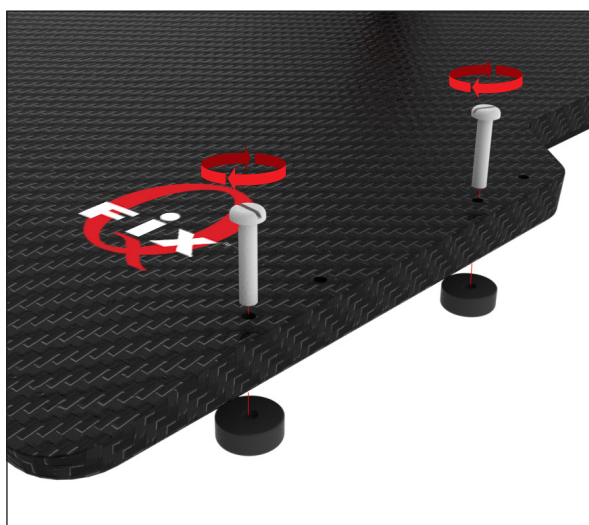



Fig. 19



Fig. 20

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527MTPCT

CT SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

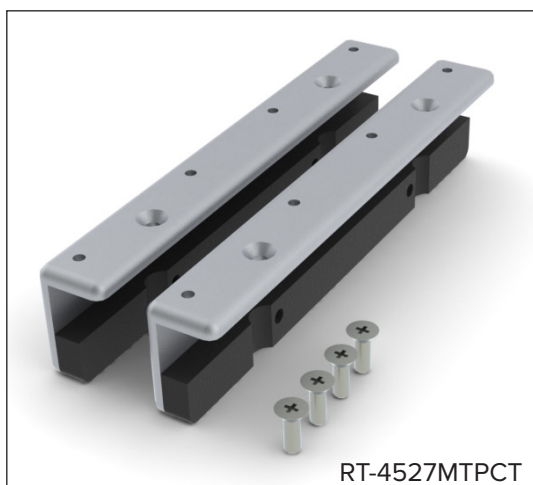

Instrumente necesare: Șurubelniță cu cap în cruce



DISPOZITIVUL *NU TREBUIE* SĂ FIE FIXAT ÎN CONSOLĂ PESTE CAPĂȚUL BLATULUI MESEI ATUNCI CÂND SE UTILIZEAZĂ ACEST ADAPTOR CT. DEPĂȘIREA EXTREMITĂȚII BLATULUI MESEI POATE CAUZA CĂDEREA DISPOZITIVULUI DE PE BLATUL MESEI, RĂNIND PACIENTUL.

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527MTPCT

1. Instalați adaptorul în poziția prezentată mai jos, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 3/4” (Fig. 20 și 21).

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru adaptor.

2. Repetați instalarea pentru adaptorul opus, menținând partea netedă a adaptorului orientată spre exterior.

3. Instalați dispozitivul prin alinierea adaptoarelor cu indexarea de-a lungul părții laterale a blatului mesei. Apăsați în jos dispozitivul până când este fixat.

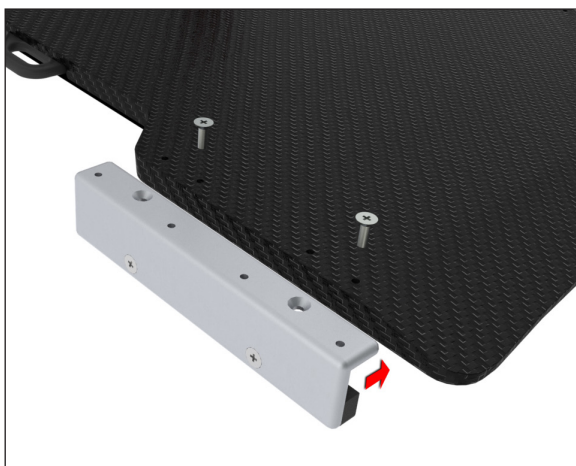


Fig. 21

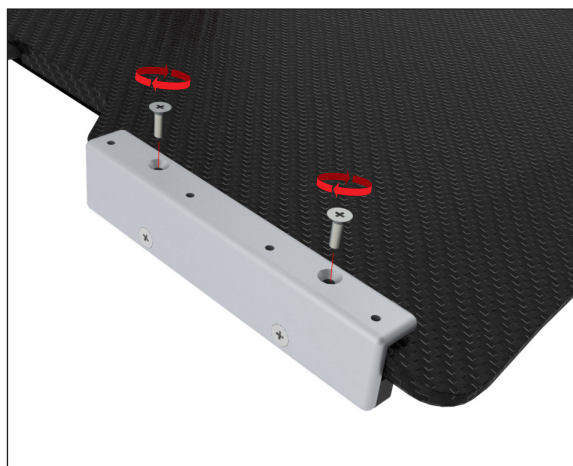



Fig. 22



Fig. 23

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

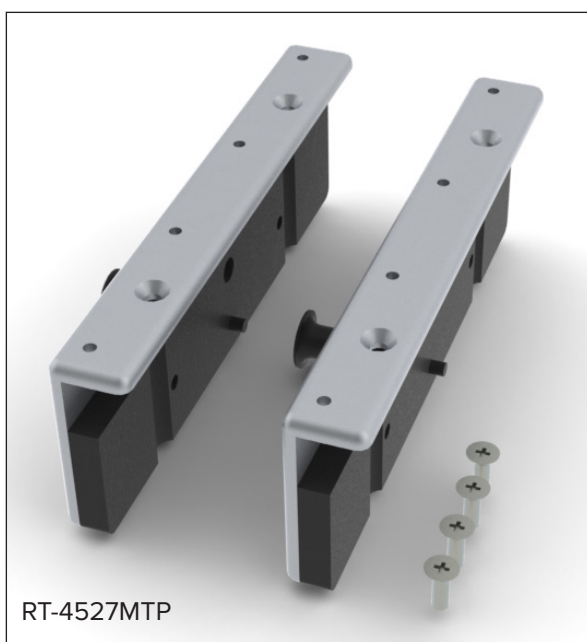

Instrumente necesare: Șurubelniță cu cap în cruce

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527MTP

1. Instalați adaptorul în poziția prezentată mai jos, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 3/4” (Fig. 24 și 25).

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru adaptor.

2. Repetați instalarea pentru adaptorul opus.

3. Instalați dispozitivul prin alinierea adaptoarelor cu indexarea de-a lungul părții laterale a blatului mesei. Răsuciți și trageți pistonul pentru a atașa/elibera dispozitivul pe blatul mesei.



Fig. 24




Fig. 25



Fig. 26

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

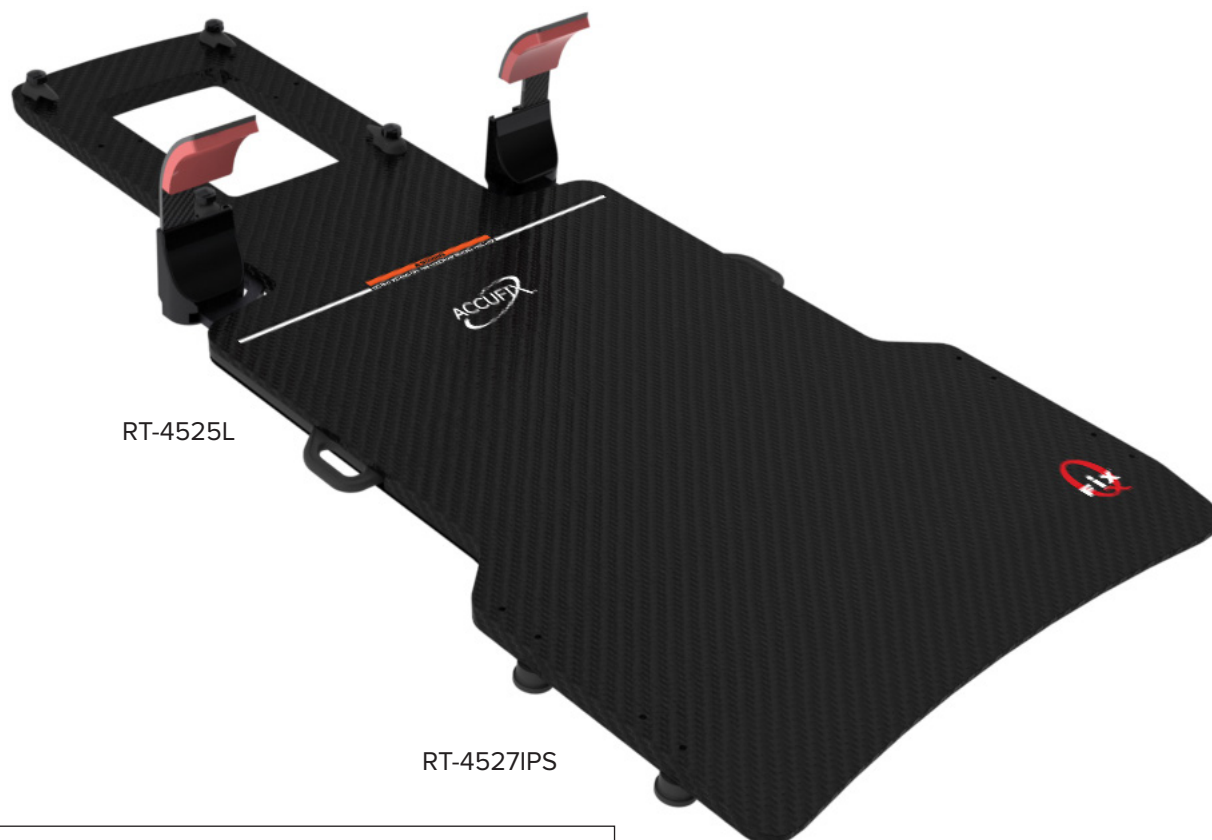

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527IPS

1. Instalați 2 discuri de localizare (cu margine) pe fiecare parte a dispozitivului, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind șuruburi 1/420 x 1 1/4” (1 pentru fiecare) (Fig. 27).

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru discuri.

2. Instalați celelalte 2 discuri de localizare (fără margine) pe partea opusă față de primele două discuri, în orificiile corespunzătoare, folosind șuruburi 1/4-20 x 1 1/4” (1 pentru fiecare) (Fig. 28).

3. Instalați dispozitivul pe blatul mesei prin alinierea discurilor cu canelurile de indexare, apoi prindeți discurile care au o margine pe blatul mesei mai întâi. Apăsăți pe cealaltă parte până când dispozitivul este fixat.

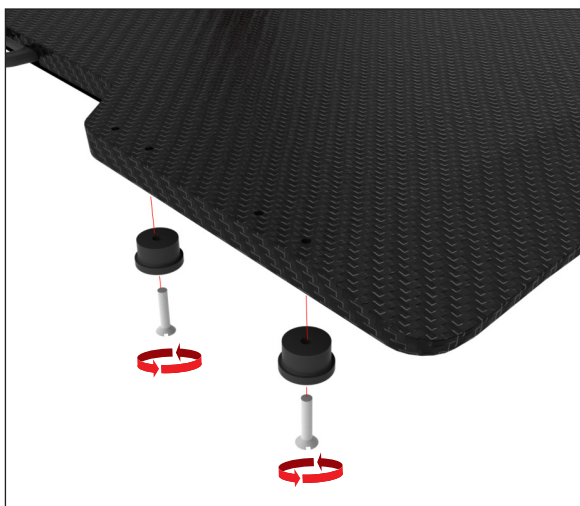


Fig. 27

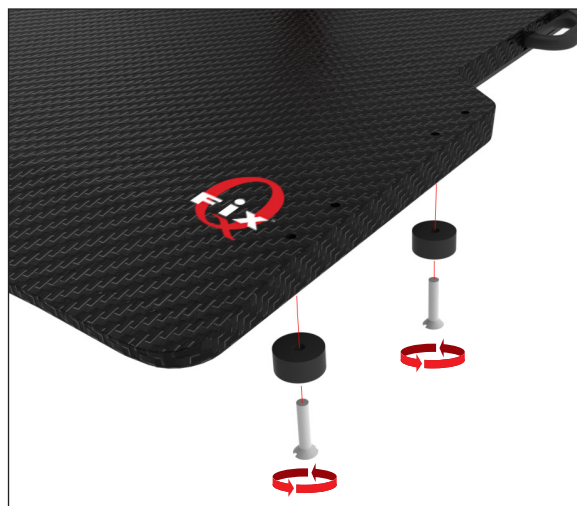



Fig. 28



Fig. 29

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT

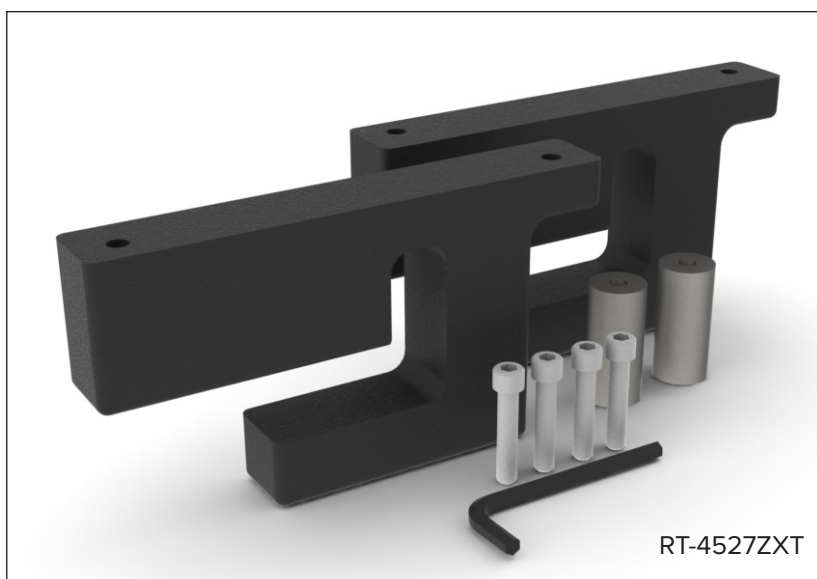

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527ZXT

1. Înlocuiți suportul pătrat de pe masa ZXT cu suportul rotund furnizat. (Fig. 30)
2. Instalați adaptorul în poziția prezentată mai jos, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi cu cap de 1/4-20 x 1 1/4” cu cheia hexagonală furnizată (Fig. 31).

! NOTĂ ! Există un adaptor drept și unul stâng; asigurați-vă că, odată instalat, adaptorul este la același nivel cu partea laterală a dispozitivului. (Fig. 32).

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru discuri.

3. Repetați instalarea pentru adaptorul opus (Fig. 33).
4. Instalați dispozitivul pe blatul mesei, agățându-l pe montantul de pe șinele de accesorii (Fig. 34).



Fig. 30



Fig. 31

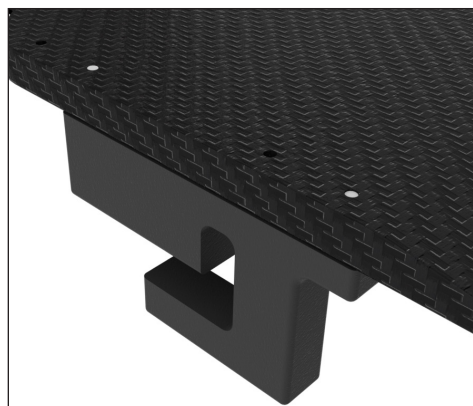


Fig. 32

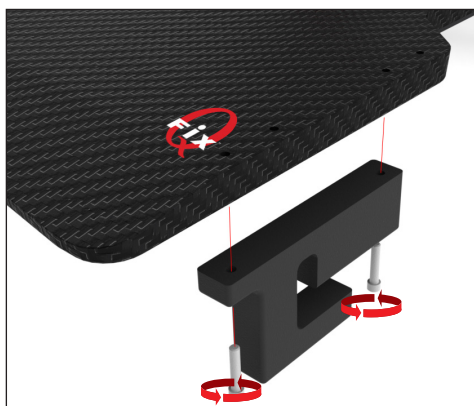




Fig. 33



Fig. 34

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527SKD

SIEMENS KD

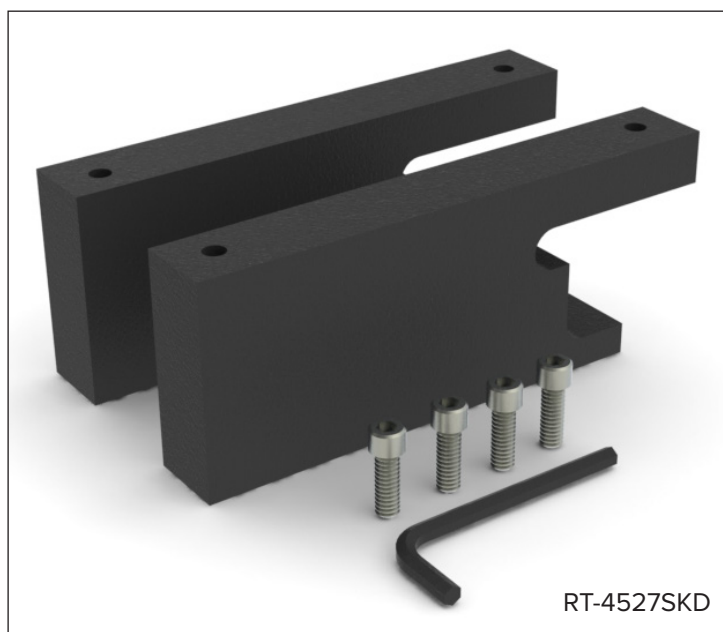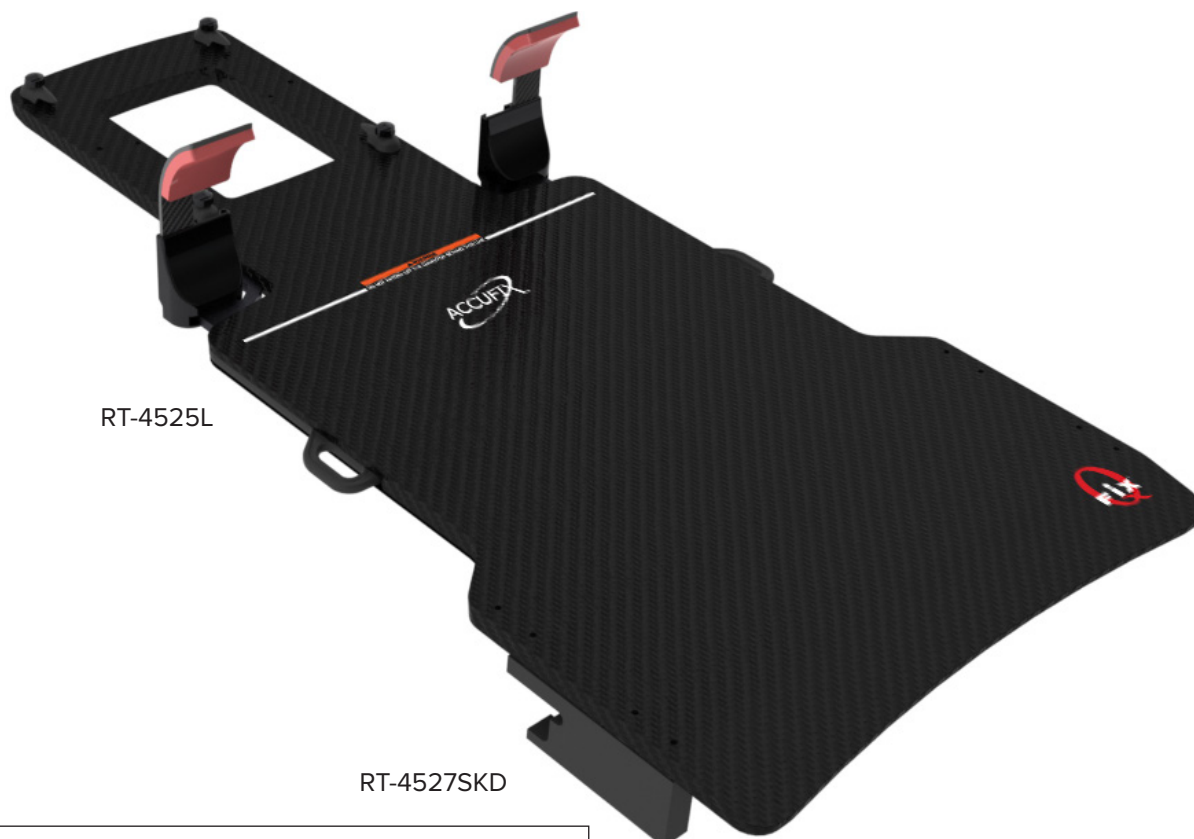

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527SKD

1. Instalați adaptorul în poziția prezentată mai jos, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi cu cap de 1/4-20 x 3/4” cu cheia hexagonală furnizată (Fig. 35).

! NOTĂ ! Există un adaptor drept și unul stâng; asigurați-vă că, odată instalat, adaptorul este la același nivel cu partea laterală a dispozitivului. (Fig. 36)

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru discuri.

2. Repetați instalarea pentru adaptorul opus (Fig. 37).

3. Instalați dispozitivul pe blatul mesei, agățând adaptorul pe montantul de pe șinele de accesorii.

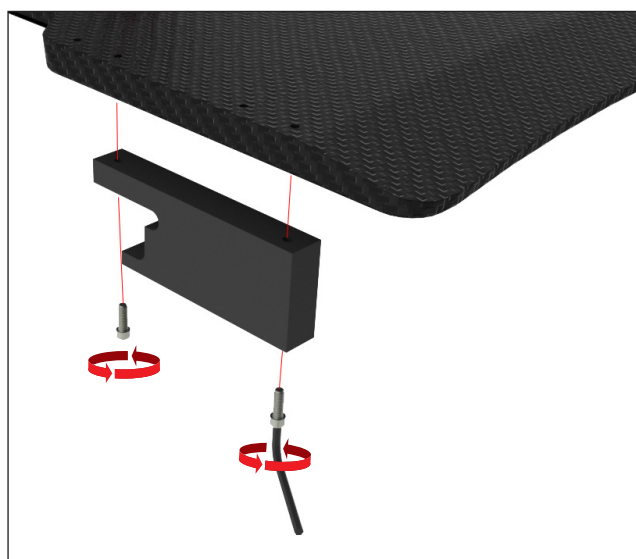


Fig. 35

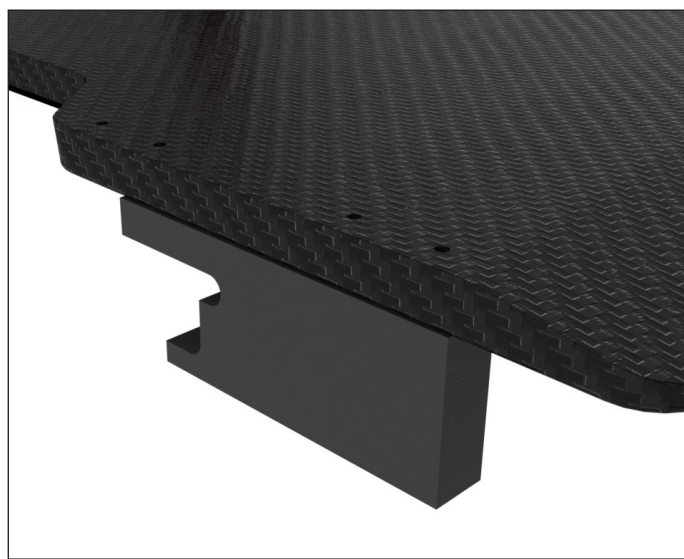


Fig. 36




Fig. 37



Fig. 38

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527ETRJ

VARIAN ETR

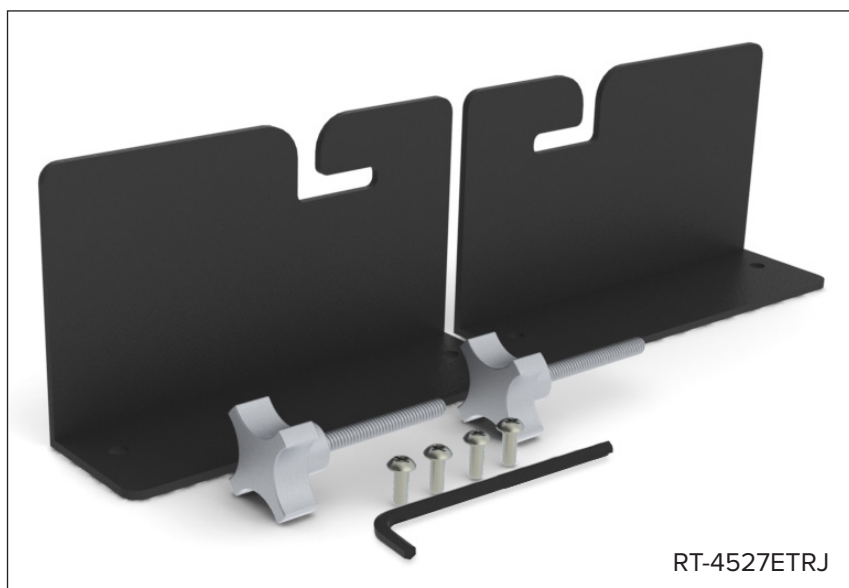

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527ETRJ

1. Scoateți al treilea șurub cu cap hexagonal din capătul superior al mesei ETR, utilizând cheia hexagonală furnizată. (Fig. 39).
 2. Repetați pe partea opusă a mesei.
 3. Înlocuiți șurubul cu cap hexagonal cu butonul furnizat. Acest buton trebuie să rămână permanent ca parte a mesei. Nu strângeți complet butonul; lăsați aproximativ 0,5 cm de cursă (Fig. 40).
 4. Repetați pe partea opusă a mesei.
 5. Instalați adaptorul în poziția prezentată mai jos, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 1/2” (Fig. 41).
- ! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru discuri.**
6. Repetați instalarea pentru adaptorul opus (Fig. 42).
 7. Instalați dispozitivul pe blatul mesei agățând adaptorul pe axul butonului. Strângeți butonul pentru fixare. (Fig. 43)



Fig. 39



Fig. 40

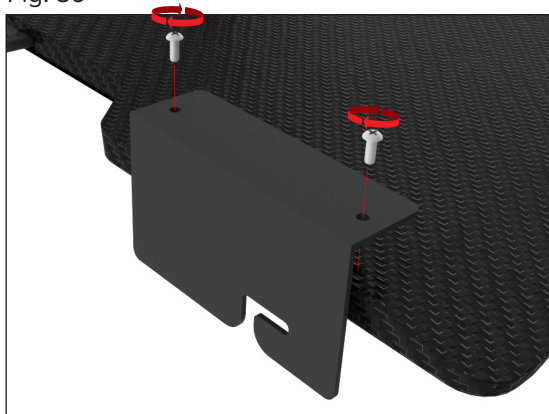


Fig. 41

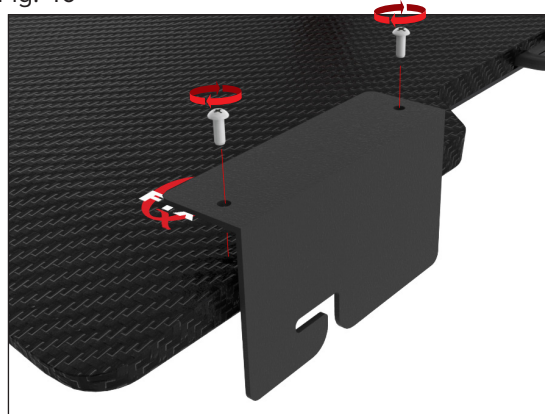


Fig. 42


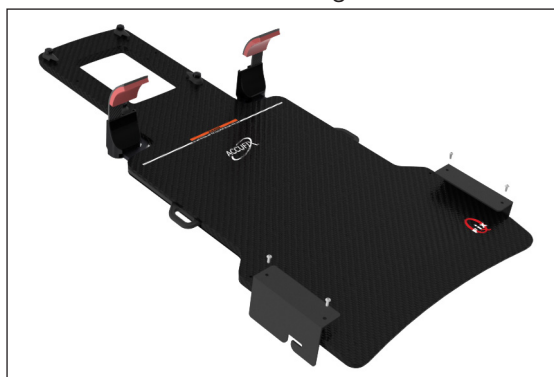


Fig. 43

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527EXA475

MODEL EXACT® ÎNGUST CU O LĂȚIME DE 500 MM ȘI ACOPERIRE
CT INDEXATĂ

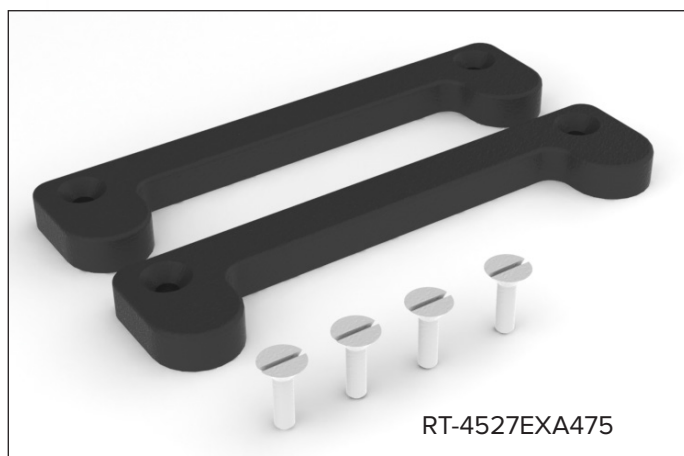

Instrumente necesare: Șurubelniță cu cap plat



DISPOZITIVUL NU TREBUIE SĂ FIE FIXAT ÎN CONSOLĂ PESTE CAPĂȚUL BLATULUI MESEI ATUNCI CÂND SE UTILIZEAZĂ ACEST ADAPTOR CT. DEPĂȘIREA EXTREMITĂȚII BLATULUI MESEI POATE CAUZA CĂDEREA DISPOZITIVULUI DE PE BLATUL MESEI, RĂNIND PACIENTUL.

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527EXA475

1. Instalați adaptorul în poziția prezentată mai jos, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 3/4” (Fig. 44).

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru discuri.

2. Repetați instalarea pentru adaptorul opus (Fig. 45).

3. Instalați dispozitivul pe blatul mesei aliniind adaptoarele cu canelurile de indexare. Apăsăți în jos dispozitivul până când este fixat.



Fig. 44




Fig. 45



Fig. 46

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527PETCT

PHILIPS GEMINI™ ȘI GE DISCOVERY™ LS 480 MM LĂȚIME ȘI
ACOPERIRE PET/CT

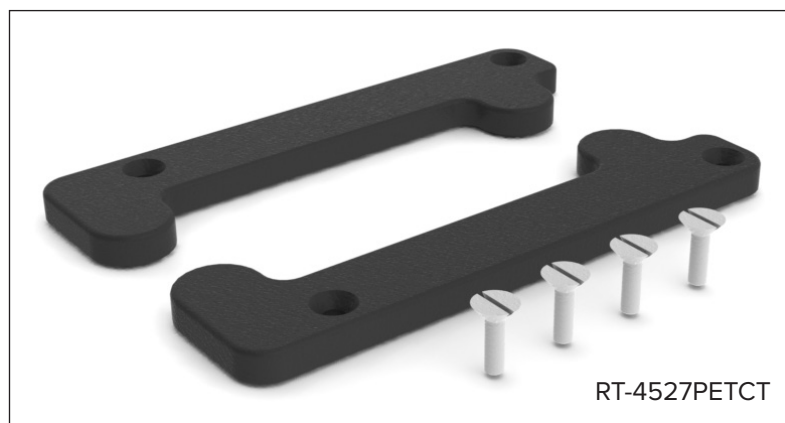

Instrumente necesare: Șurubelniță cu cap plat



DISPOZITIVUL NU TREBUIE SĂ FIE FIXAT ÎN CONSOLĂ PESTE CAPĂȚUL BLATULUI MESEI ATUNCI CÂND SE UTILIZEAZĂ ACEST ADAPTOR CT. DEPĂȘIREA EXTREMITĂȚII BLATULUI MESEI POATE CAUZA CĂDEREA DISPOZITIVULUI DE PE BLATUL MESEI, RĂNIND PACIENTUL.

POZIȚIONAREA ADAPTORULUI RT-4527PETCT

1. Instalați adaptorul în poziția prezentată mai jos, în două dintre orificiile distanțate la 140 mm (5,5”), folosind 2 șuruburi 1/4-20 x 3/4” (Fig. 47).

! NOTĂ ! Nu contează ce set de orificii sunt utilizate, însă dacă este instalat un element structural pentru mâner, atunci utilizați setul de orificii disponibil pentru discuri.

2. Repetați instalarea pentru adaptorul opus (Fig. 48).

3. Instalați dispozitivul pe blatul mesei aliniind adaptoarele cu canelurile de indexare. Apăsăți în jos dispozitivul până când este fixat.



Fig. 47

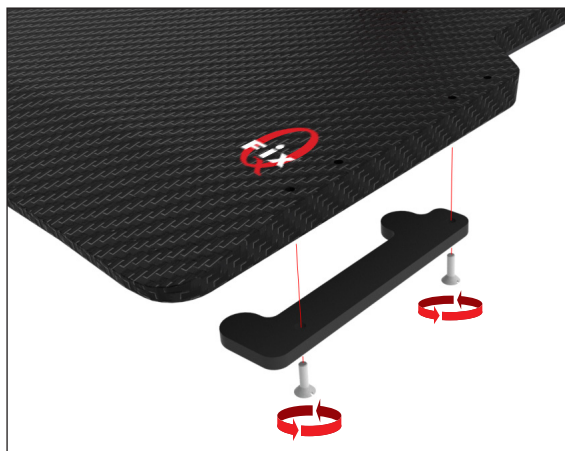


Fig. 48



Fig. 49

MONTAREA ELEMENTULUI DE FIXARE

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (fig. 50)

1. Scoateți cele 2 șuruburi și fixați adaptorul de elementul structural pentru mâner.
2. Așezați elementul de fixare între adaptor și elementul structural pentru mâner, aliniind orificiile șuruburilor cu orificiile elementului de fixare.
3. Montați din nou cele două șuruburi până la fixare.
4. Continuați cu instrucțiunile de configurare.

RT-4527LMI3 (fig. 51)

1. Scoateți cele 2 șuruburi și fixați adaptorul de elementul structural pentru mâner.
2. Așezați elementul de fixare între adaptor și elementul structural pentru mâner, aliniind orificiile șuruburilor cu orificiile elementului de fixare.
3. Montați din nou cele două șuruburi până la fixare.
4. Continuați cu instrucțiunile de configurare.



Fig. 50

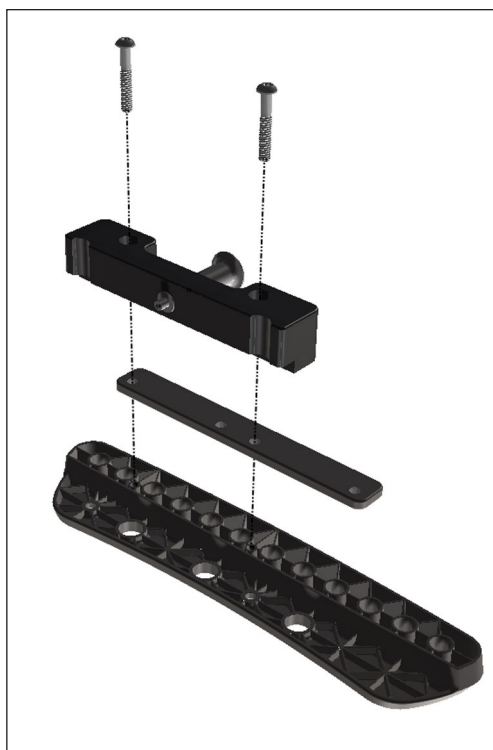


Fig. 51



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com