

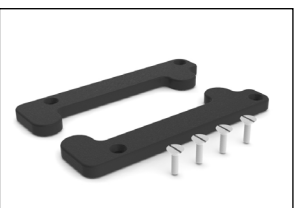
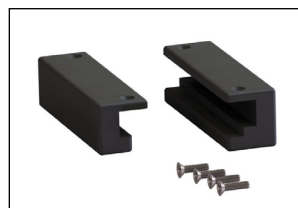
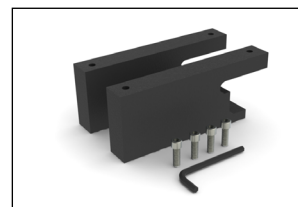
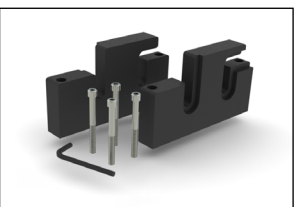
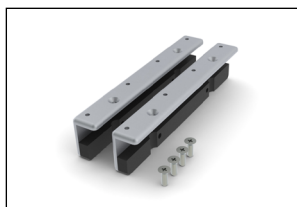
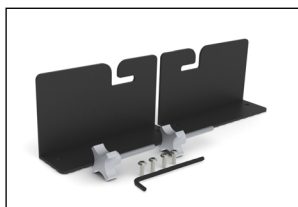
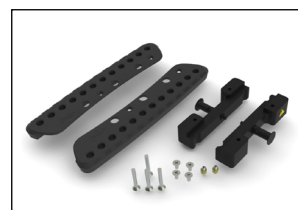
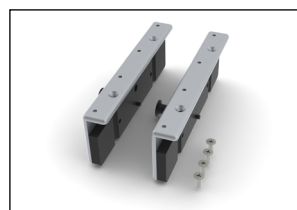


NÁVOD NA INŠTALÁCIU A NÁVOD NA POUŽITIE

Polohovacie adaptéry

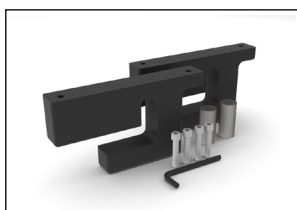

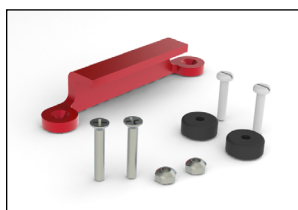

EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Vyrobené v USA spoločnosťou Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass a Hand Grip Array sú ochranné známky spoločnosti Qfix.

Exact® a ETR® sú registrované ochranné známky spoločnosti Varian Medical Systems.

Medical Intelligence I-Beam je ochranná známka a Precise® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Elekta AB.

ZXT a TXT sú ochranné známky spoločnosti Siemens AG.

Med-Tec Prodigy a IPPS sú ochranné známky spoločnosti Civco Medical Solutions.

Gemini je ochranná známka spoločnosti Philips Medical Systems.

Discovery je ochranná známka spoločnosti GE Medical.

OBSAH

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	4
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527LMI3.....	5
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527LTOMO.....	7
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527MI.....	9
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527EXAG.....	11
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527QFIX.....	13
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527ELK.....	15
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4529M.....	17
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527MTPCT.....	19
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527MTP.....	21
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527IPS.....	23
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527ZXT.....	25
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527SKD.....	27
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527ETRJ.....	29
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527EXA475.....	31
INŠTALÁCIA ADAPTÉRA RT-4527PETCT.....	33
INŠTALÁCIA VLOŽKY.....	35

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke Qfix.com.

! VAROVANIE ! VŠETKY ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TOHTO ZARIADENIA NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 ALEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

Adaptéry slúžia na prácu so zariadeniami AccuFix™ Cantilever Board™, CURVE™ Board a BoS™ Headframe.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA VŠEOBECNÉHO POUŽITIA

Pri používaní nasledujúcich adaptérov CT by zariadenie NEMALO byť umiestnené cez koniec dosky stola:


- RT-4527LTOMO (str. 7)
- RT-4529M (str. 20)
- RT-4527MTPCT (str. 22)
- RT-4527EXA475 (str. 34)
- RT-4527PETCT (str. 36)

Ak adaptéry uložíte prečnievajúc cez koniec dosky stola, môže dôjsť k pádu zariadenia z dosky stola a k úrazu pacienta.

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527LMI3

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ A ADAPTÉR NA TOMOTERAPIU

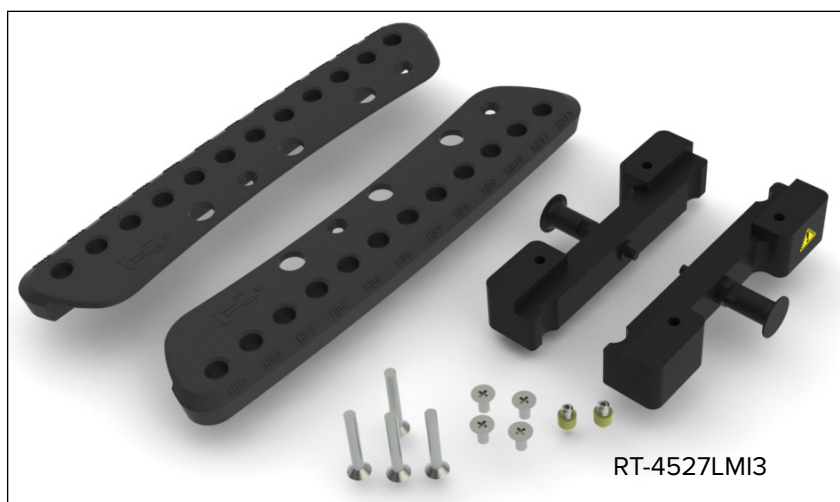

Potrebné nástroje: Krížový skrutkovač



! VAROVANIE ! BUĎTE OPATRNÍ, PRETOŽE MEDZI ADAPTÉROM ZARIADENIA A DOSKOU STOLA MÔŽE DÔJSŤ K POMLIAŽDENIU, AK TLAK PRESIAHNE VÝSTRAŽNÚ ČIARU.

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527LMI3


! POZNÁMKA ! Ak inštalujete na zariadenie s hrúbkou 28 mm (napr. Encompass™), pred pokračovaním v nastavovaní prejdite na stranu 38, na ktorej je uvedená inštalácia vložky.

1. Ku každému zariadeniu Hand Grip Array namontujte adaptéry pomocou 2 skrutiek (na každé zariadenie) $\frac{1}{4}$ -20 x 1 $\frac{1}{2}$ " (obr. 1).
2. Priamo na spodnú časť zariadenia namontujte adaptér na umiestnenie žltého kužeľa (na každú stranu nainštalujte jeden). (Obr. 2 a 2a)
3. Na zariadenie namontujte doplnky Hand Grip Array. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek (na každý) $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ ". (Obr. 3)


! POZNÁMKA ! Medzi adaptérom zariadenia a doskou stola môže dôjsť k pomliaždeniu, ak tlak presiahne výstražnú čiaru.

! POZNÁMKA ! Viac informácií o inštalácii doplnkov Hand Grip Array nájdete v sprievodcovi produktom a v návode na použitie doplnkov Hand Grip Array.

4. Zariadenie umiestnite na doske stola tak, že zarovnáte žltý kužeľ s nastavovacími otvormi na hornom povrchu dosky stola. Otočte a potiahnite piest, aby ste zariadenie pripevnili k doske stola/uvoľnili z dosky stola.

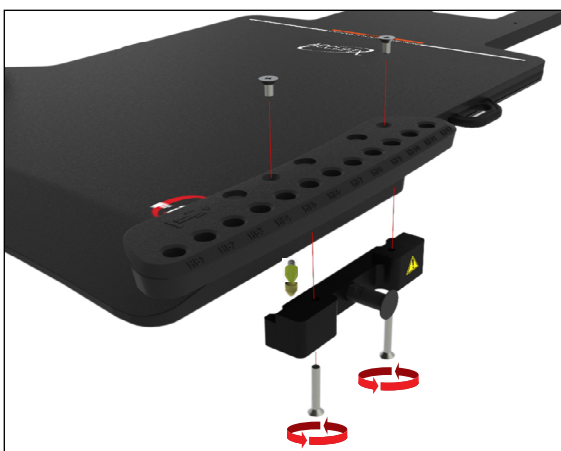


Obr. 1

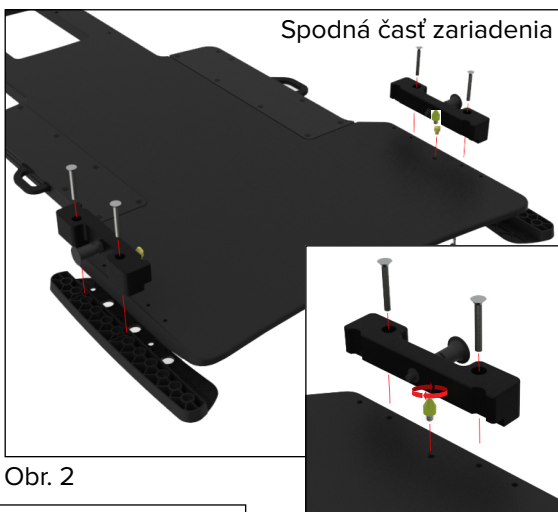

Obr. 2

Obr. 2a

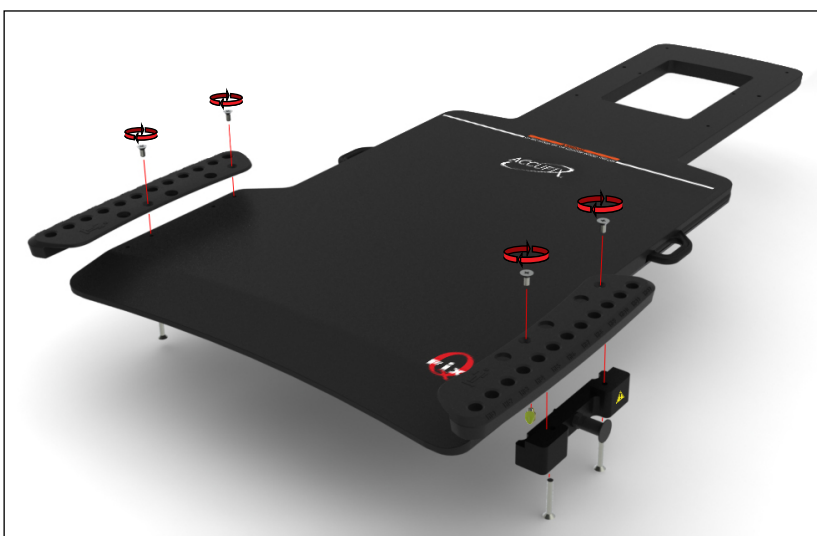

Obr. 3

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527LTOMO




! VAROVANIE ! PRI POUŽITÍ TOHTO ADAPTÉRA NEUMIESTŇUJTE ZARIADENIE CEZ KONIEC DOSKY STOLA. V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DÔJSŤ K PÁDU DOSKY STOLA A K ÚRAZU PACIENTA.

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527LTOMO

1. Priamo na spodnú časť zariadenia namontujte adaptér na umiestnenie žltého kužela (na každú stranu nainštalujte jeden) (obr. 4 a 5).
2. Zariadenie umiestnite na doske stola tak, že zarovnáte žltý kužeľ s nastavovacími otvormi na hornom povrchu dosky stola.

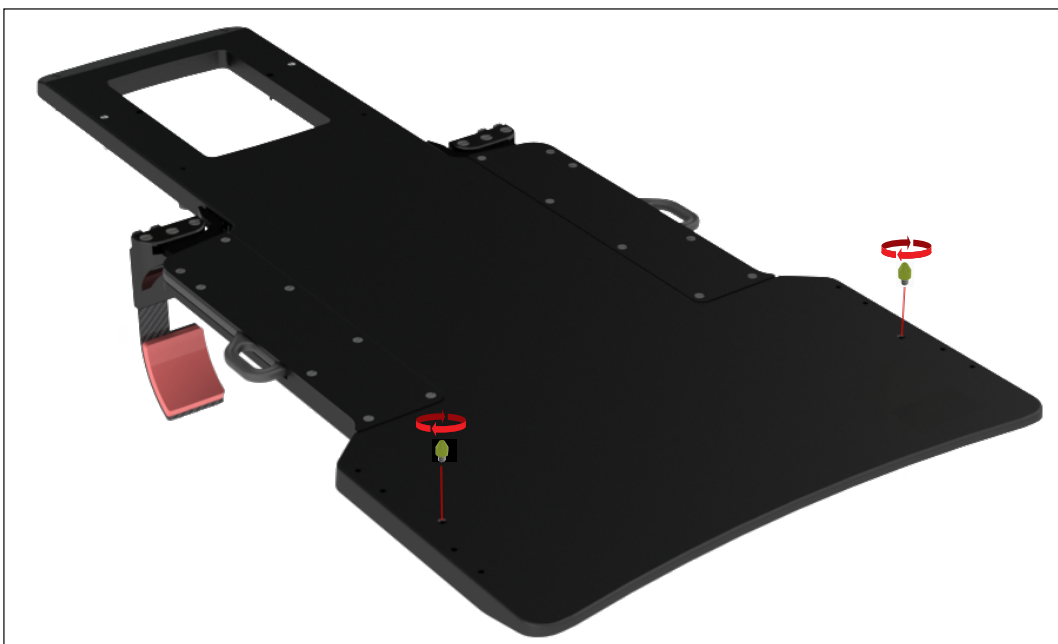

Obr. 4



Obr. 5

NASTAVENIE ADAPTÉRA


RT-4527MI

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ A ADAPTÉR NA TOMOTERAPIU



RT-4527MI

Používajte len s doskou
CURVE™ Board

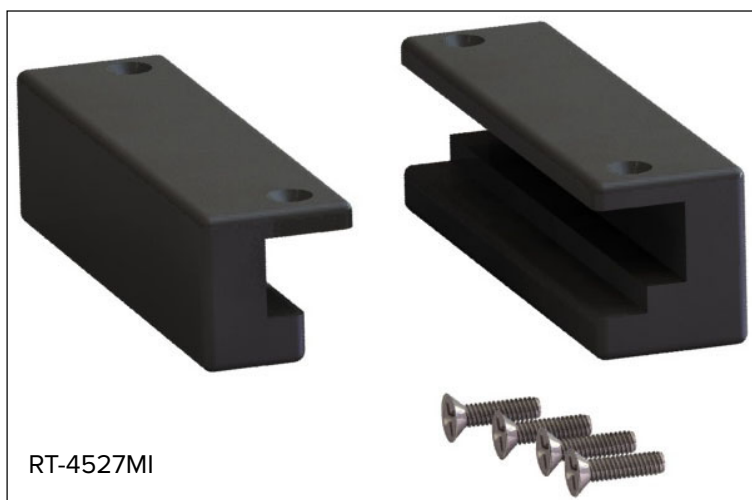

RT-4527MI

Potrebné nástroje: Křížový šroubovák

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527MI


1. Jeden z adaptérov namontujte na jednu stranu zariadenia v zobrazenej polohe pomocou 2 (na každej strane) $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ " skrutiek. (Obr. 6)

! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na adaptér.


2. Inštaláciu zopakujte pri opačnom adaptéri (obr. 7).

3. Umiestnite nastavovaciu lištu s 2 kolíkmi do požadovanej polohy (po pripevnení sa kolíky nastavovacej lišty zarovnajú s otvormi v spodnej časti zariadenia) (obr. 6, 7 a 8).

4. Zariadenie namontujte na dosku stola tak, že najprv pripevníte väčší z dvoch adaptérov na dosku stola, potom pripevníte menší adaptér a zariadenie nastavíte pomocou nastavovacej lišty s 2 kolíkmi.

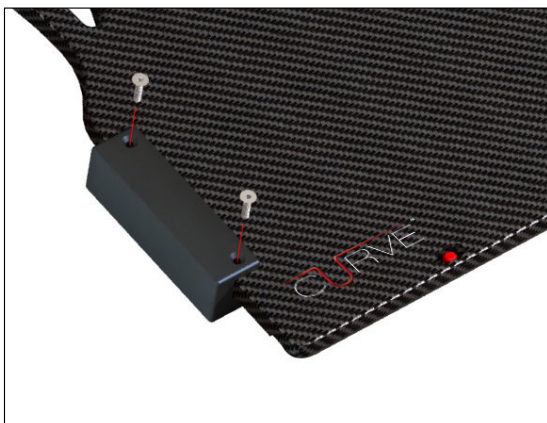

Obr. 6

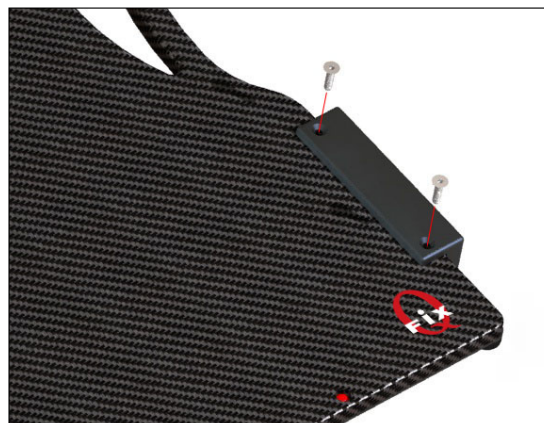

Obr. 7




Obr. 8

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527EXAG

ADAPTÉR VARIAN EXACT®

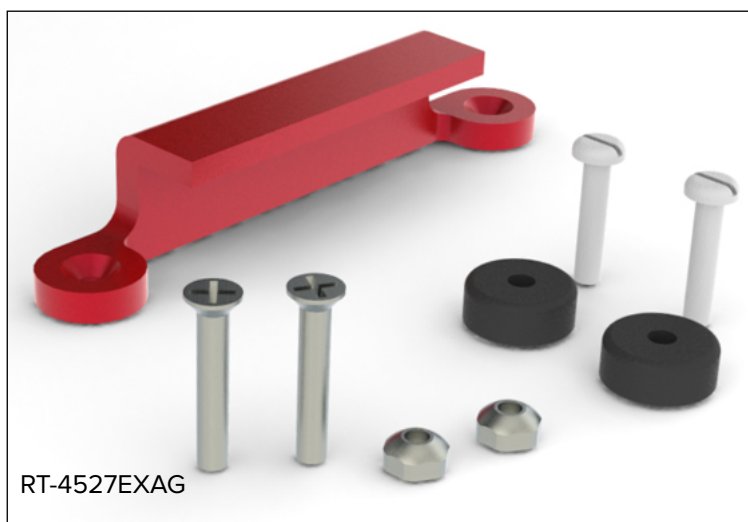

Potrebné nástroje: Krížový skrutkovač a plochý skrutkovač

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527EXAG


1. Do zariadenia namontujte červený adaptér. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{3}{8}$ ". Potom na skrutky z hornej strany zariadenia upevnite 2 $\frac{1}{4}$ -20 bezpečnostné matice (obr. 9).

! POZNÁMKA ! Adaptér je možné nainštalovať na pravú alebo ľavú stranu zariadenia. Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na adaptér.

2. Na opačnú stranu nastavovacieho adaptéra nainštalujte 2 umiestňovacie disky. Použite príslušné otvory a skrutky $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{4}$ " (1 na každý) (obr. 10).
3. Zariadenie namontujte na dosku stola tak, že červený adaptér pripevníte na jednu stranu a potom zatlačíte stranu s umiestňovacími diskami dolu do nastavovacích zárezov, kým nebude zaistená.



Obr. 9

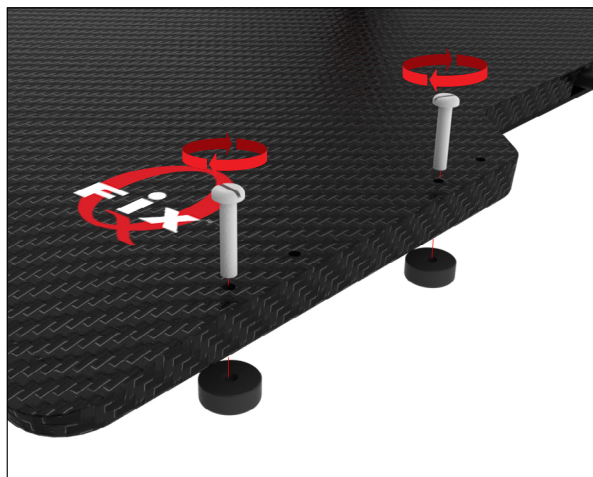

Obr. 10



Obr. 11

NASTAVENIE ADAPTÉRA RT-4527QFIX

ADAPTÉR QFIX™ KVUE™ A QUANTUM™



Potrebné nástroje: Krížový skrutkovač a plochý skrutkovač

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527QFIX


1. Do zariadenia namontujte adaptér. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{4}$ ". Uistite sa, že časť adaptéra s presahom smeruje dovnútra, aby sa mohol zaistiť na okraji zariadenia Qfix (obr. 12).

! POZNÁMKA ! Adaptér je možné nainštalovať na pravú alebo ľavú stranu zariadenia. Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na adaptér.

2. Na opačnú stranu nastavovacieho adaptéra nainštalujte 2 umiestňovacie disky. Použite príslušné otvory a skrutky $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{4}$ " (1 na každý otvor) (obr. 13).
3. Zariadenie namontujte na dosku stola tak, že adaptér pripevníte na jednu stranu dosky stola a potom zatlačíte stranu s umiestňovacími diskami dolu do nastavovacích zárezov, kým nebude zaistená.



Obr. 12

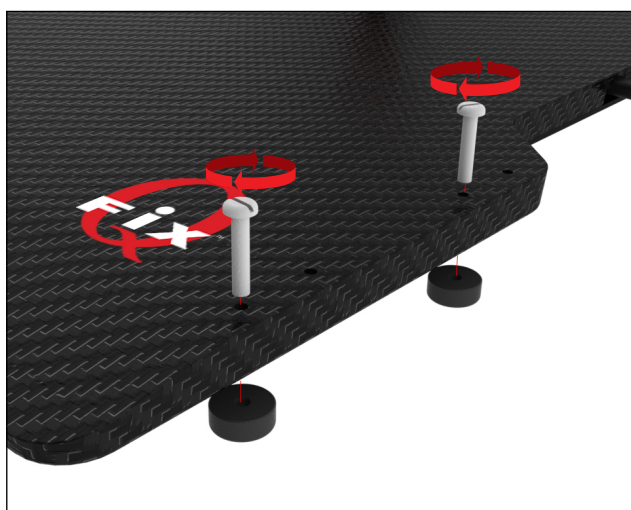

Obr. 13




Obr. 14

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

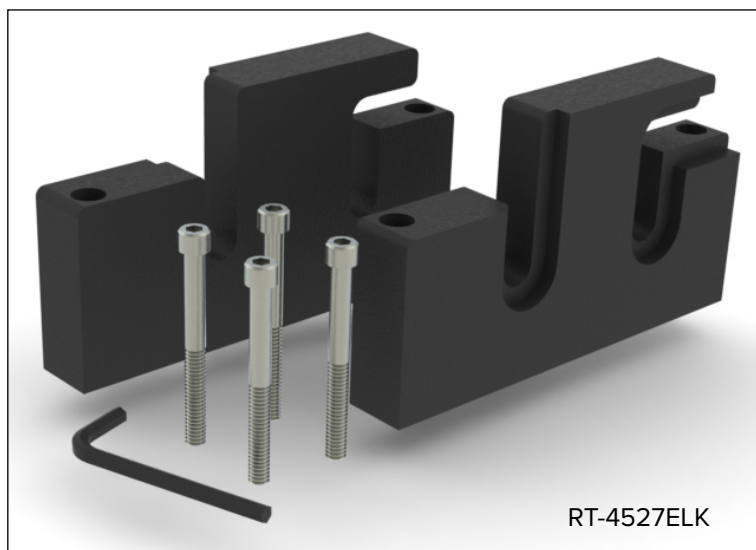

NASTAVENIE ADAPTÉRA


RT-4527ELK

1. Adaptér namontujte tak, aby bol hladký povrch na vonkajšej strane zariadenia a aby bol adaptér v nižšie uvedenej polohe. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek s uzávermi $\frac{1}{4}$ -20 x 2 $\frac{1}{2}$ " a pomocou dodaného šesťhranného kľúča (obr. 14).


! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na adaptér.

2. Inštaláciu zopakujte pri opačnom adaptéri a hladkú stranu adaptéra pritom udržiajte smerom von (obr. 15).

3. Zariadenie namontujte na dosku stola pripevnením adaptéra na stojan na doplnkových koľajničkách.

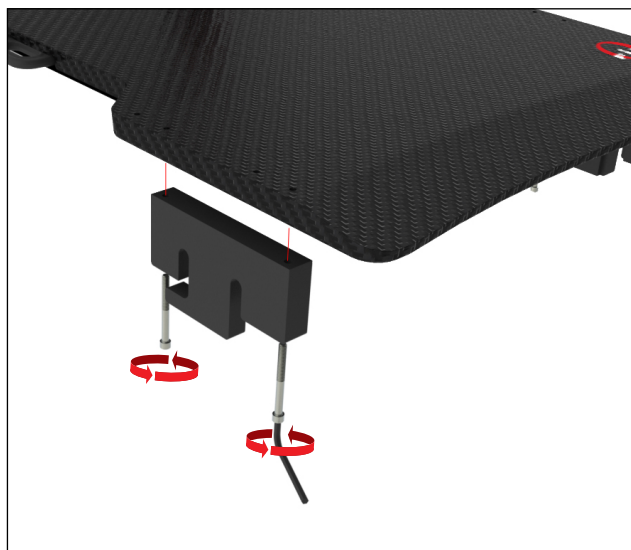

Obr. 15

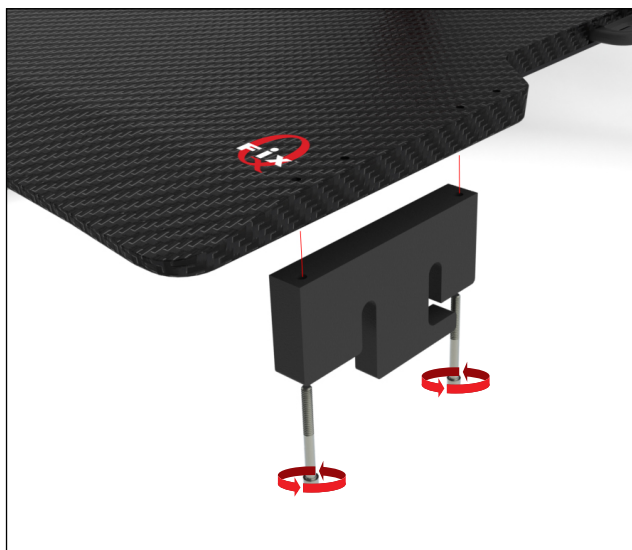

Obr. 16



Obr. 17

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4529M

VARIAN EXACT® KOMPATIBILNÝ S CT



Potrebné nástroje: Plochý skrutkovač



PRI POUŽÍVANÍ TOHTO ADAPTÉRA CT NEUMIESTŇUJTE ZARIADENIE TAK, ABY PREČNIEVALO CEZ KONIEC DOSKY STOLA. AK ADAPTÉRY ULOŽÍTE PREČNIEVAJÚC CEZ KONIEC DOSKY STOLA, MÔŽE DÔJSŤ K PÁDU ZARIADENIA Z DOSKY STOLA A K ÚRAZU PACIENTA.

NASTAVENIE ADAPTÉRA


RT-4529M

1. Na obe strany zariadenia namontujte 2 polohovacie disky. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5") pomocou skrutiek ¼-20 x 1 ¼" (1 na každú stranu) (obr. 17).


! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na disky.

2. Na opačnú stranu nainštalujte zostávajúce 2 umiestňovacie disky tak ako pri prvých dvoch diskoch. Použite príslušné otvory a skrutky ¼-20 x 1 ¼" (1 na každý otvor) (obr. 18).

3. Zariadenie namontujte na dosku stola tak, že umiestňovacie disky zarovnáte s nastavovacími zárezmi. Zatlačte zariadenie nadol, aby sa zaistilo.

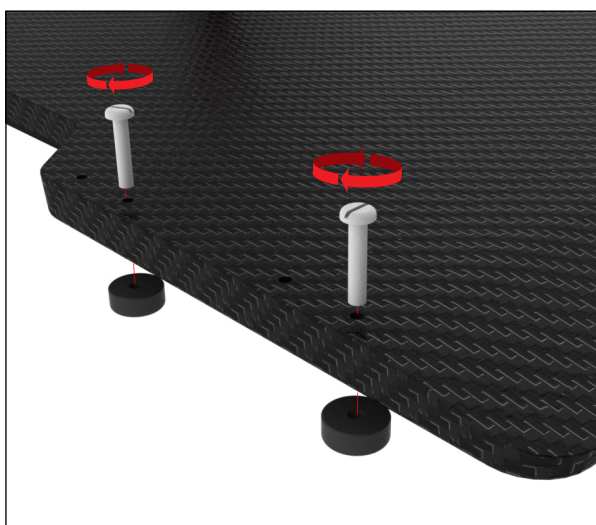

Obr. 18

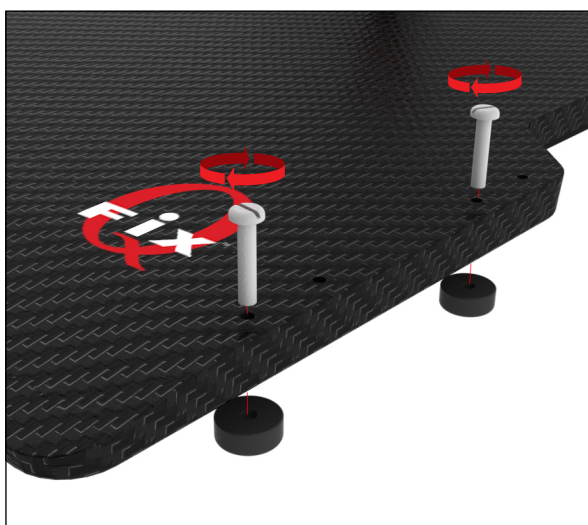


Obr. 19



Obr. 20

NASTAVENIE ADAPTÉRA RT-4527MTPCT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ CT

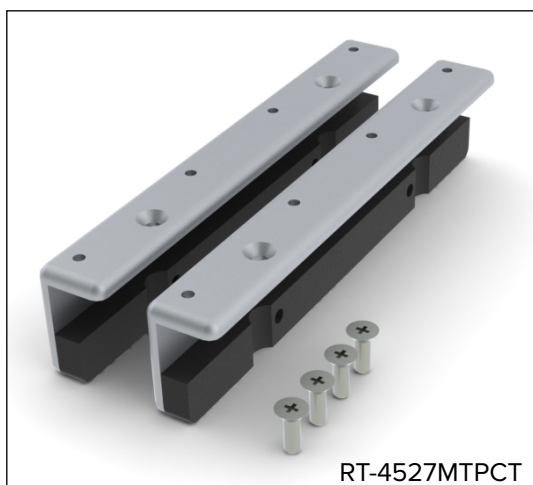

Potrebné nástroje: Křížový skrutkovač



PRI POUŽÍVANÍ TOHTO ADAPTÉRA CT ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE TAK, ABY PREČNIEVALO CEZ KONIEC DOSKY STOLA. AK ADAPTÉRY ULOŽÍTE PREČNIEVAJÚC CEZ KONIEC DOSKY STOLA, MÔŽE DÔJSŤ K PÁDU ZARIADENIA Z DOSKY STOLA A K ÚRAZU PACIENTA.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A NÁVOD NA POUŽITIE – 2002950_IFU, Indexing Adapters_SK

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | ☎ +1 610-268-0585 | 📠 +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

NASTAVENIE ADAPTÉRA


RT-4527MTPCT

1. Adaptér namontujte do polohy uvedenej nižšie. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{4}$ " (Obr. 20 a 21).


! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na adaptér.

2. Inštaláciu zopakujte pri opačnom adaptéri a hladkú stranu adaptéra pri tom udržiajte smerom von.

3. Zariadenie namontujte tak, že adaptéry zarovnáte s nastavovacími zárezmi pozdĺž dosky stola. Zatlačte zariadenie nadol, aby sa zaistilo.

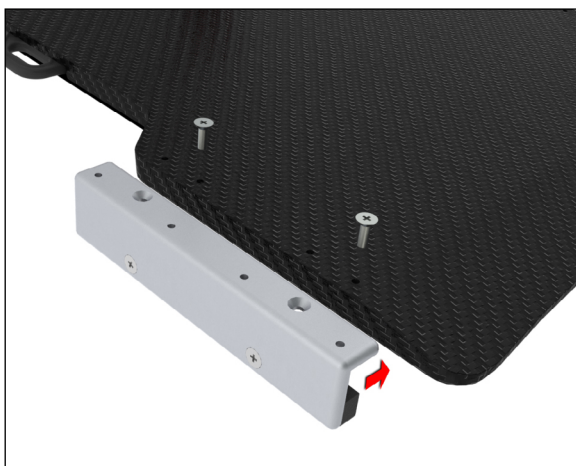

Obr. 21

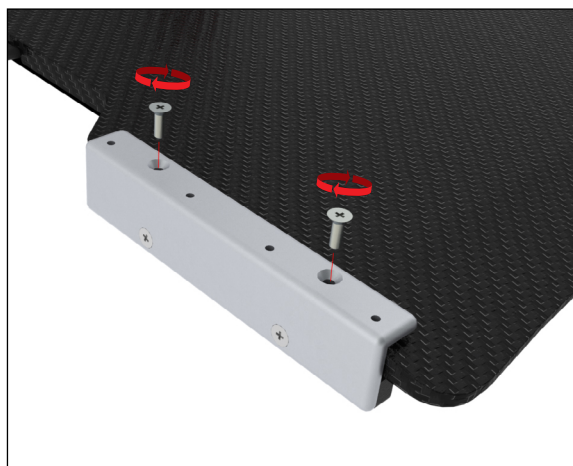

Obr. 22




Obr. 23

NASTAVENIE ADAPTÉRA


RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

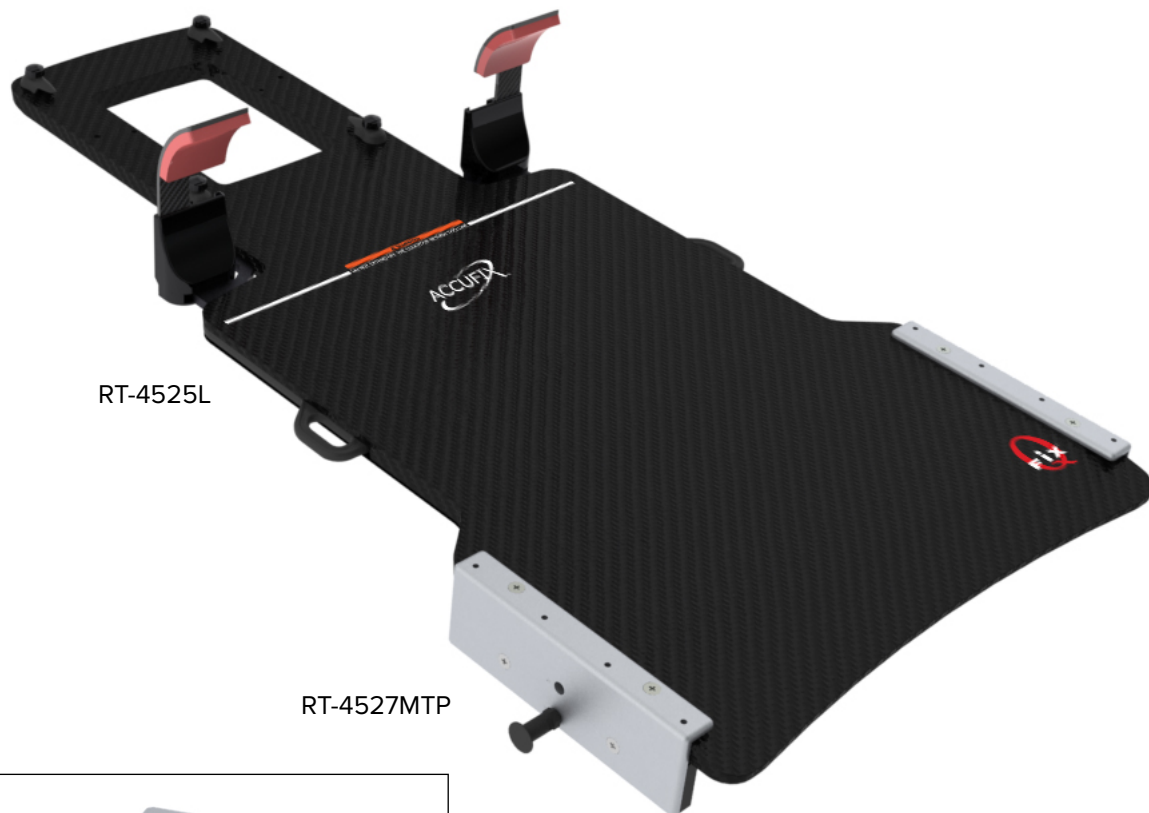

RT-4525L

RT-4527MTP

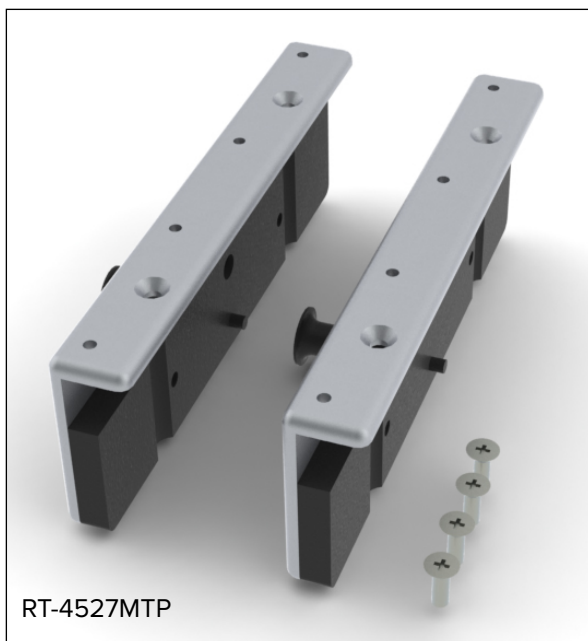

RT-4527MTP

Potrebné nástroje: Krížový skrutkovač

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527MTP

1. Adaptér namontujte do polohy uvedenej nižšie. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek ¼-20 x ¾" (obr. 24 a 25).

! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na adaptér.

2. Inštaláciu zopakujte pri opačnom adaptéri.

3. Zariadenie namontujte tak, že adaptéry zarovnáte s nastavovacími zárezmi pozdĺž dosky stola. Otočte a potiahnite piest, aby ste zariadenie pripevnili k doske stola/uvoľnili z dosky stola.



Obr. 24



Obr. 25




Obr. 26

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

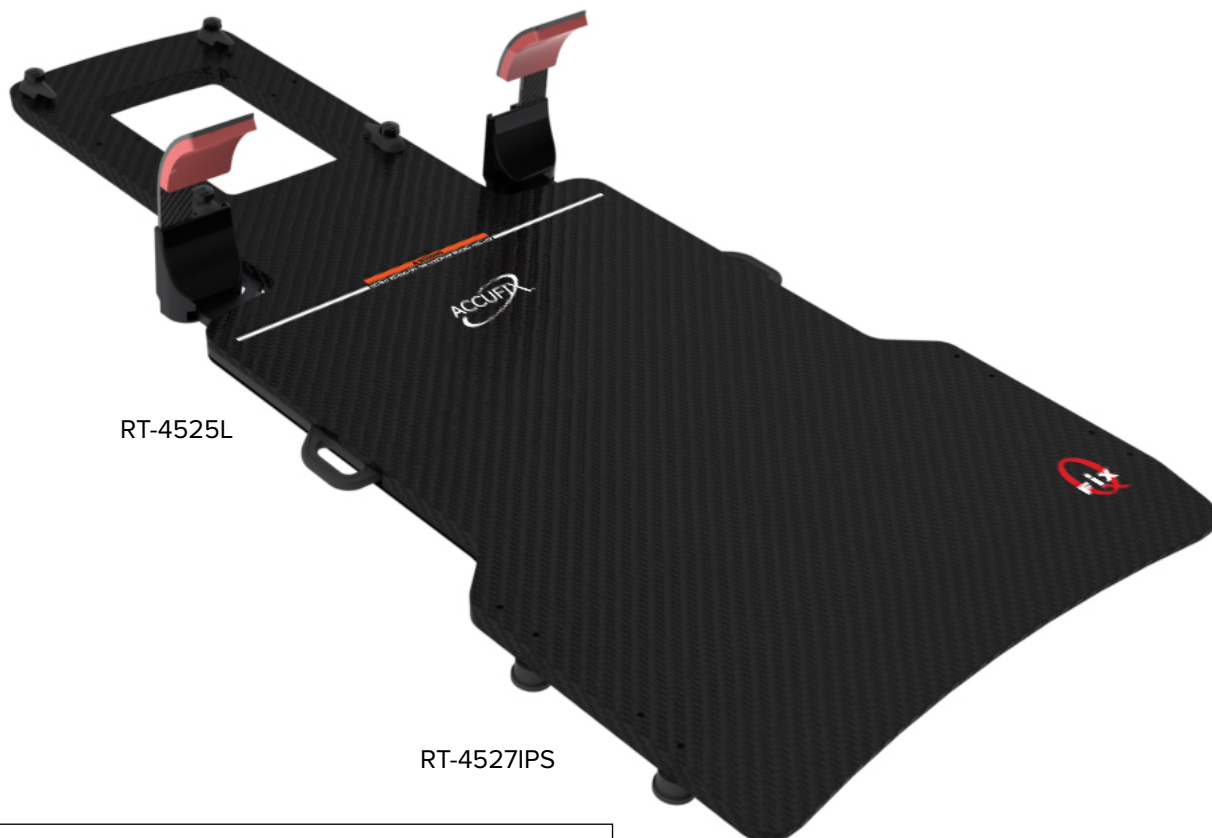

NASTAVENIE ADAPTÉRA


RT-4527IPS

1. Na obe strany zariadenia namontujte 2 polohovacie disky (s okrajom). Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5") pomocou skrutiek ¼- 20 x 1 ¼" (1 na každú stranu) (obr. 27).


! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na disky.

2. Na opačnú stranu nainštalujte zostávajúce 2 umiestňovacie disky (bez okraja) tak ako pri prvých dvoch diskoch. Použite príslušné otvory a skrutky ¼-20 x 1 ¼" (1 na každý otvor) (obr. 28).

3. Zariadenie namontujte na dosku stola tak, že disky zarovnáte s nastavovacími zárezmi a potom najprv k doske stola pripevníte disky s okrajom. Zatiačte na druhú stranu, kým nebude zariadenie zaistené.

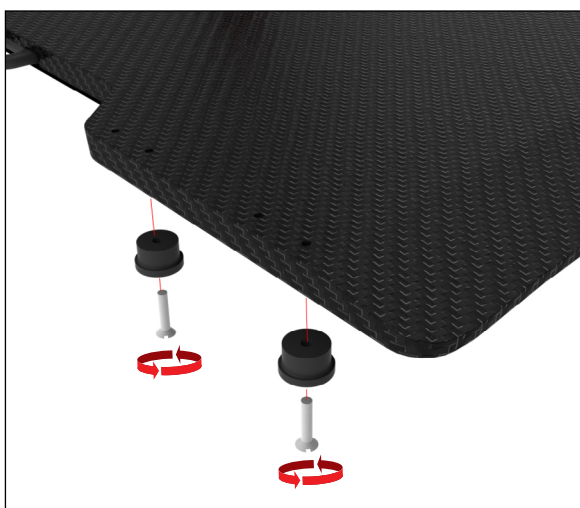

Obr. 27

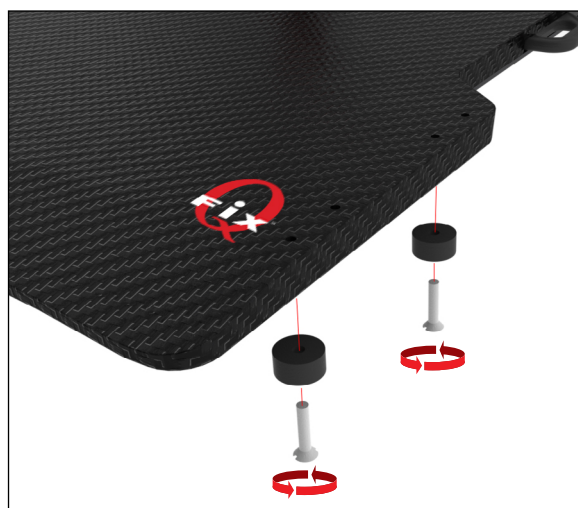

Obr. 28



Obr. 29

NASTAVENIE ADAPTÉRA


RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT



RT-4525L

RT-4527ZXT

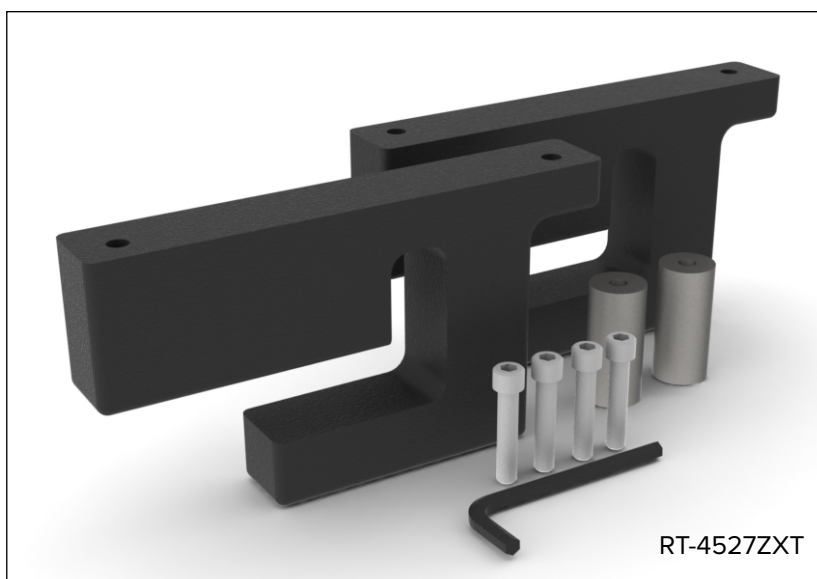


RT-4527ZXT

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527ZXT


1. Vymeňte štvorcový stojan na ZXT gauči za dodaný okrúhly stojan. (Obr. 30)
 2. Adaptér namontujte do polohy uvedenej nižšie. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek s uzáverom ¼-20 x 1 ¼" (obr. 31) a pomocou dodaného šesťhranného kľúča.
- ! POZNÁMKA !** K dispozícii je pravý a ľavý adaptér. Uistite sa, že je po inštalácii adaptér zarovnaný so stranou zariadenia. (Obr. 32).
- ! POZNÁMKA !** Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na disky.
3. Inštaláciu zopakujte pri opačnom adaptéri (obr. 33).
 4. Zariadenie namontujte na dosku stola pripevnením adaptéra na stojan na doplnkových koľajničkách (obr. 34).

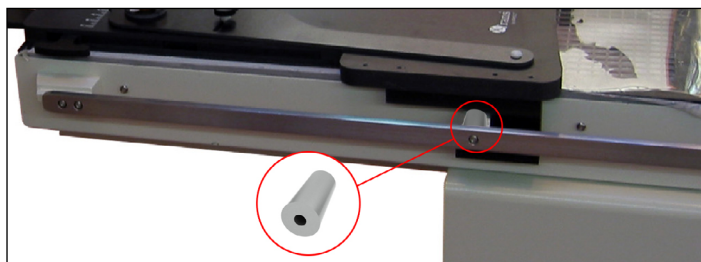


Obr. 30



Obr. 31

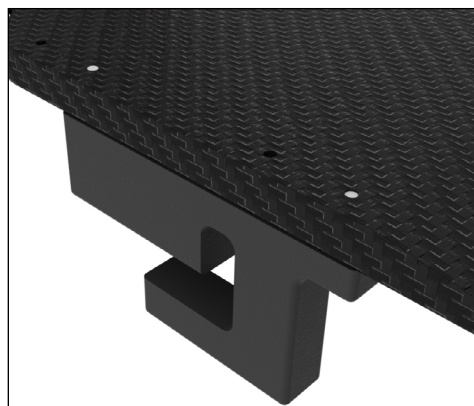

Obr. 32

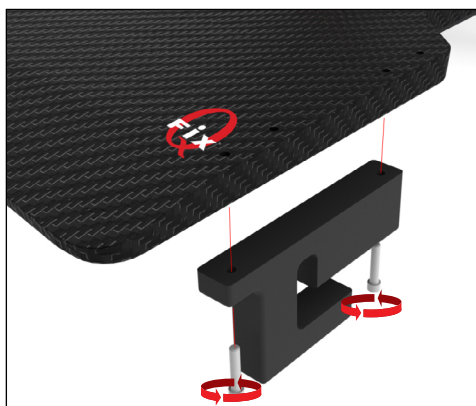

Obr. 33





Obr. 34

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527SKD

SIEMENS KD

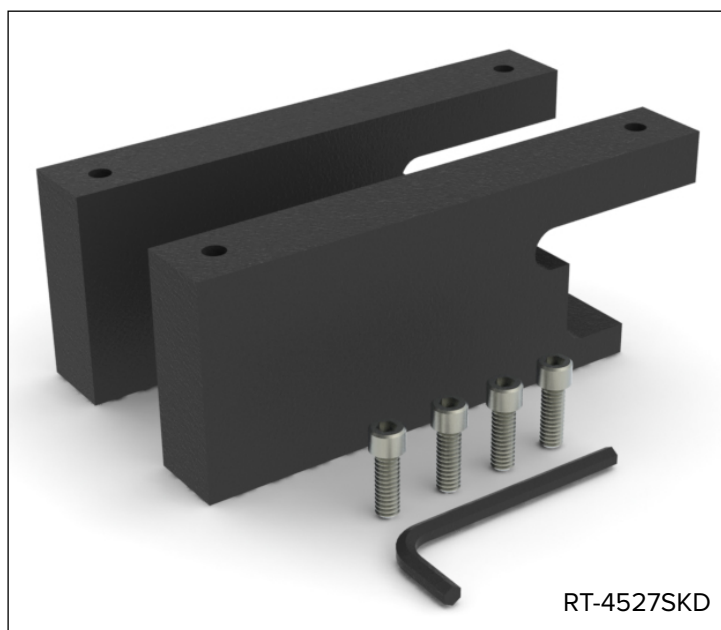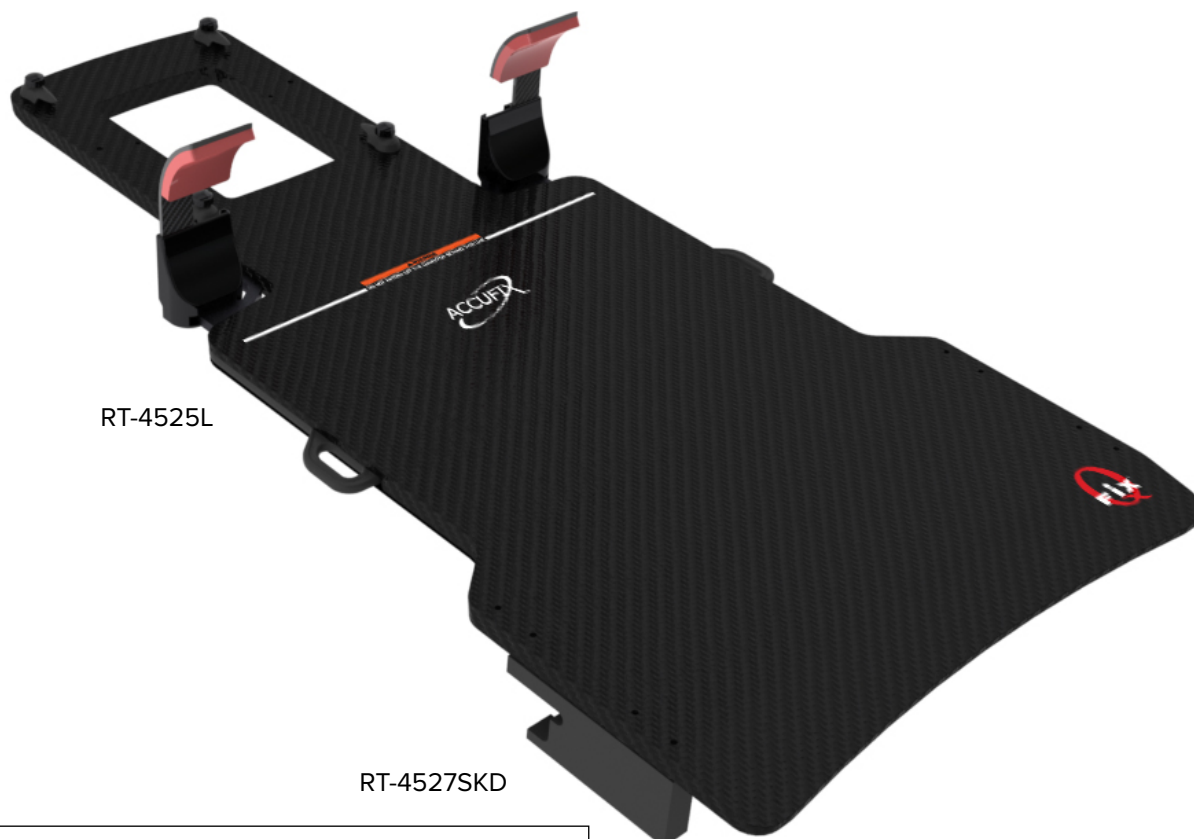

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527SKD


1. Adaptér namontujte do polohy uvedenej nižšie. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek s uzáverom 1/4-20 x 3/4" (obr. 35) a pomocou dodaného šesťhranného kľúča.

! POZNÁMKA ! K dispozícii je pravý a ľavý adaptér. Uistite sa, že je po inštalácii adaptér zarovnaný so stranou zariadenia. (Obr. 36)


! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na disky.

2. Inštaláciu zopakujte pri opačnom adaptéri (obr. 37).

3. Zariadenie namontujte na dosku stola pripevnením adaptéra na stojan na doplnkových koľajničkách.

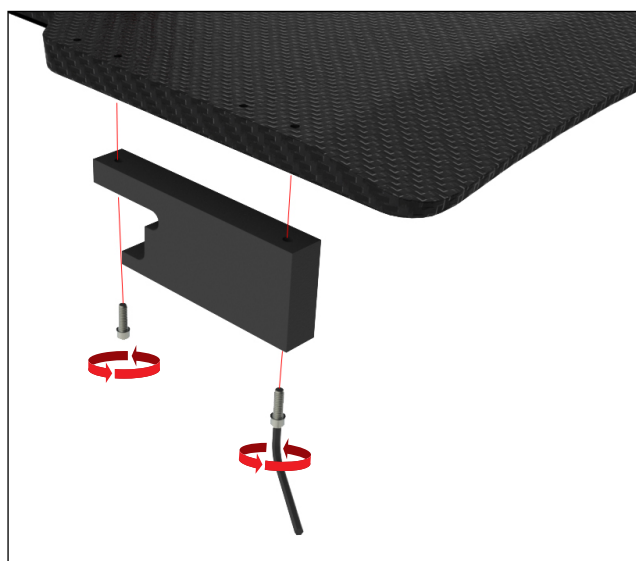

Obr. 35

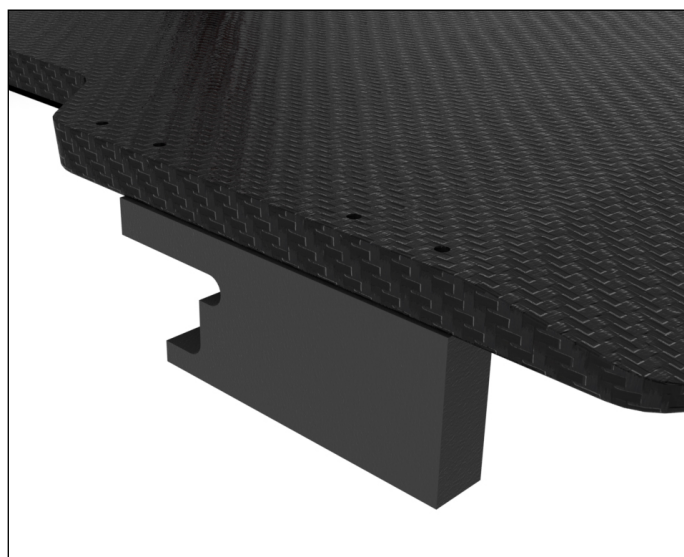

Obr. 36



Obr. 37




Obr. 38

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527ETRJ

VARIAN ETR

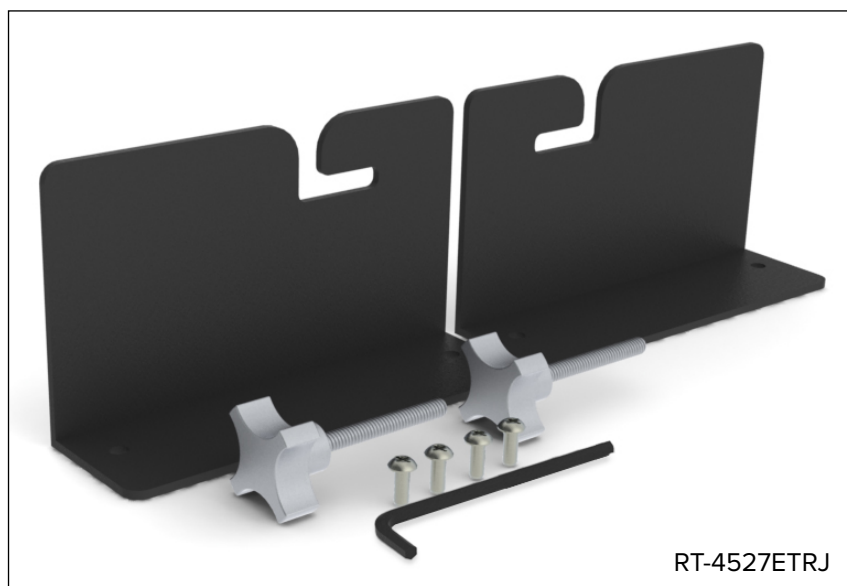

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527ETRJ


1. Pomocou dodávaného šesťhranného kľúča vyberte tretiu imbusovú skrutku z horného konca ETR stola. (Obr. 39).
 2. Postup zopakujte na opačnej strane stola.
 3. Vymeňte imbusovú skrutku za dodávaný gombík. Tento gombík by mal zostať na stole natrvalo ako súčasť stola. Gombík úplne neuťahujte. Nechajte vôľu asi 0,5 cm (obr. 40).
 4. Postup zopakujte na opačnej strane stola.
 5. Adaptér namontujte do polohy uvedenej nižšie. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ " (obr. 41).
- ! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na disky.**
6. Inštaláciu zopakujte pri opačnom adaptéri (obr. 42).
 7. Zariadenie namontujte na dosku stola pripevnením adaptéra na hriadeľ gombíka. Dotiahnite gombík, aby ste ho zaistili. (Obr. 43)




Obr. 39




Obr. 40

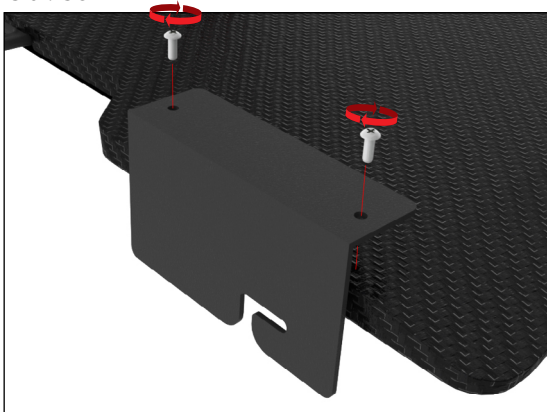

Obr. 41

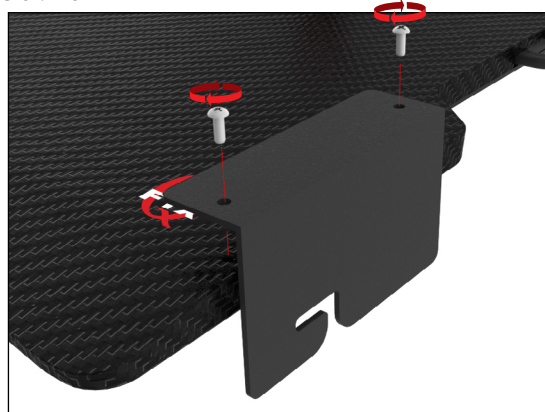

Obr. 42

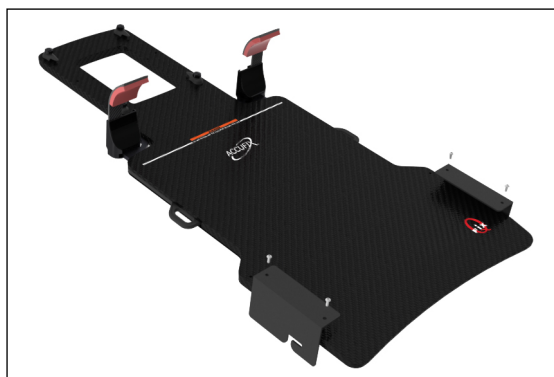


Obr. 43

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527EXA475

NARROW EXACT® ŠTÝL 500 MM ŠIROKÉ POLOHOVANÉ
PREKRYTIE NA CT

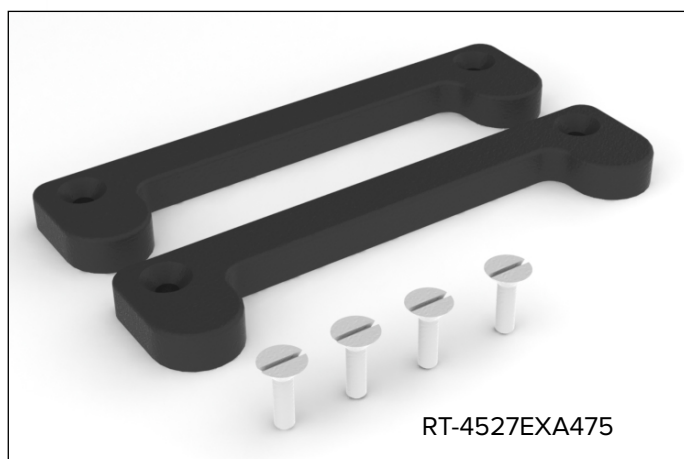

Potrebné nástroje: Plochy skrutkovač



PRI POUŽÍVANÍ TOHTO ADAPTÉRA CT ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE TAK, ABY PREČNIEVALO CEZ KONIEC DOSKY STOLA. AK ADAPTÉRY ULOŽÍTE PREČNIEVAJÚC CEZ KONIEC DOSKY STOLA, MÔŽE DÔJSŤ K PÁDU ZARIADENIA Z DOSKY STOLA A K ÚRAZU PACIENTA.

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527EXA475

1. Adaptér namontujte do polohy uvedenej nižšie. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek ¼-20 x ¾" (obr. 44).

! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na disky.

2. Inštaláciu zopakujte pri opačnom adaptéri (obr. 45).

3. Zariadenie namontujte na dosku stola tak, že adaptéry zarovnáte s nastavovacími zárezmi. Zatlačte zariadenie nadol, aby sa zaistilo.



Obr. 44



Obr. 45



Obr. 46

NASTAVENIE ADAPTÉRA


RT-4527PETCT

PHILIPS GEMINI™ A GE DISCOVERY™ LS 480 MM ŠIROKÉ PREKRYTIE
PET/CT



RT-4525L

RT-4527PETCT

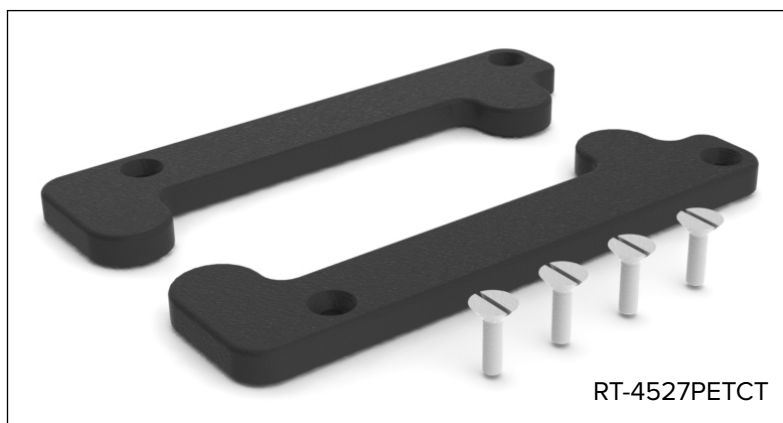

RT-4527PETCT

Potrebné nástroje: Plochý skrutkovač



PRI POUŽÍVANÍ TOHTO ADAPTÉRA CT ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE TAK, ABY PREČNIEVALO CEZ KONIEC DOSKY STOLA. AK ADAPTÉRY ULOŽÍTE PREČNIEVAJÚC CEZ KONIEC DOSKY STOLA, MÔŽE DÔJSŤ K PÁDU ZARIADENIA Z DOSKY STOLA A K ÚRAZU PACIENTA.

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527PETCT

1. Adaptér namontujte do polohy uvedenej nižšie. Použite dva z otvorov vzdialených od seba 140 mm (5,5 palcov) pomocou 2 skrutiek ¼-20 x ¾" (obr. 47).


! POZNÁMKA ! Nezáleží na tom, ktorú skupinu otvorov použijete. Ak je však nainštalované zariadenie Hand Grip Array, použite dostupnú súpravu otvorov na disky.

2. Inštaláciu zopakujte pri opačnom adaptéri (obr. 48).

3. Zariadenie namontujte na dosku stola tak, že adaptéry zarovnáte s nastavovacími zárezmi. Zatlačte zariadenie nadol, aby sa zaistilo.



Obr. 47

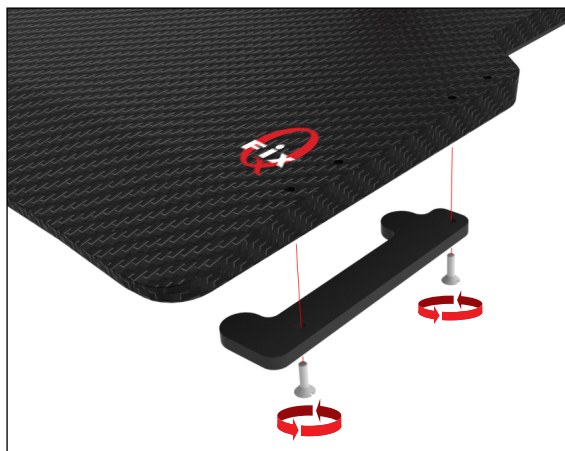

Obr. 48



Obr. 49

INŠTALÁCIA VLOŽKY

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (Obr. 50)


1. Odskrutkujte 2 skrutky, ktorými je adaptér pripevnený k zariadeniu Hand Grip Array.
2. Vložku umiestnite medzi adaptér a zariadenie Hand Grip Array a otvory pre skrutky zarovnajte s otvormi vo vložke.
3. Znova zaskrutkujte dve skrutky, kým nebudú zaistené.
4. Pokračujte podľa pokynov na nastavenie.

RT-4527LMI3 (Obr. 51)

1. Odskrutkujte 2 skrutky, ktorými je adaptér pripevnený k zariadeniu Hand Grip Array.
2. Vložku umiestnite medzi adaptér a zariadenie Hand Grip Array a otvory pre skrutky zarovnajte s otvormi vo vložke.
3. Znova zaskrutkujte dve skrutky, kým nebudú zaistené.
4. Pokračujte podľa pokynov na nastavenie.



Obr. 50

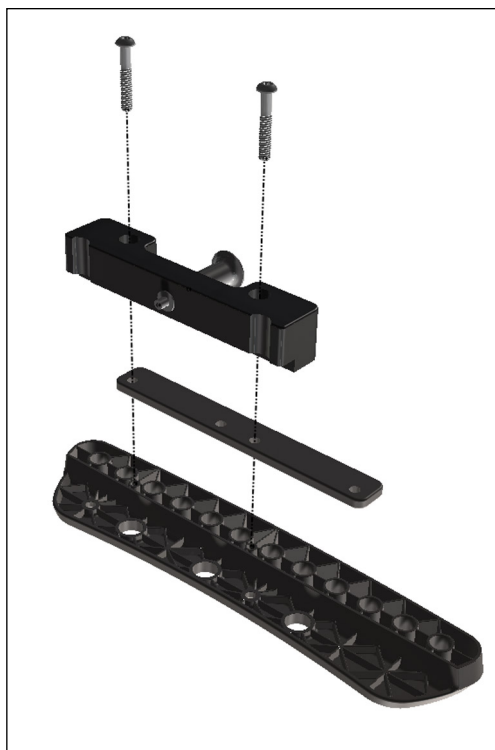

Obr. 51



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com