
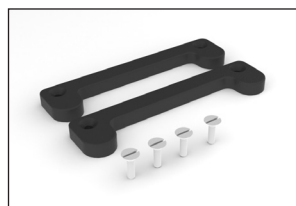
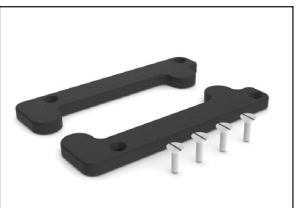
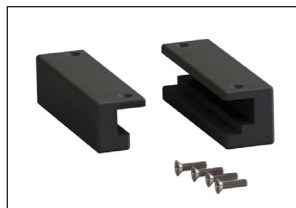
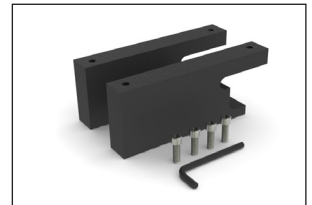
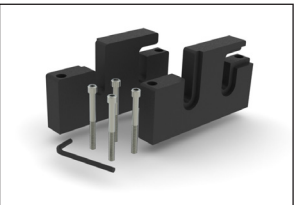
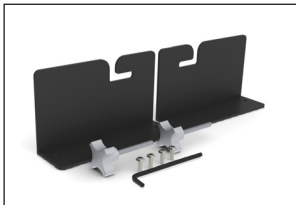
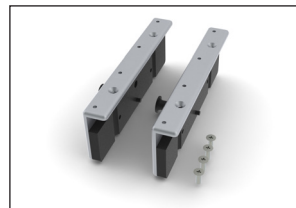
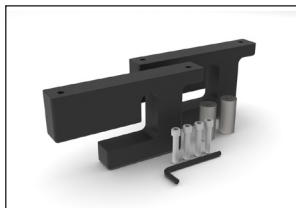


คู่มือการติดตั้ง และคู่มือสำหรับผู้ใช้

ตัวต่ออ้างอิงตำแหน่ง

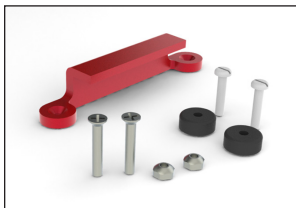

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass และ Hand Grip Array เป็นเครื่องหมายการค้าของ Qfix

Exact® และ ETR® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Varian Medical Systems

Medical Intelligence I-Beam เป็นเครื่องหมายการค้าและ Precise® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Elekta AB

ZXT และ TXT เป็นเครื่องหมายการค้าของ Siemens AG

Med-Tec Prodigy และ IPPS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Civco Medical Solutions

Gemini เป็นเครื่องหมายการค้าของ Philips Medical Systems

Discovery เป็นเครื่องหมายการค้าของ GE Medical

ข้อพึงระวังทั่วไป

ข้อความแจ้งเตือน

โปรดดูรายการสัญลักษณ์และคำอธิบายสัญลักษณ์เหล่านั้นได้ที่ CQmedical.com

! คำเตือน ! ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงอุปกรณ์นี้ หากส่วนประกอบใดๆ ของอุปกรณ์นี้มีโหลดการทำงานที่มากเกินไปจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง มีร่องรอยของความเสียหาย หรือทำงานไม่ถูกต้อง ให้หยุดใช้งานทันทีและติดต่อ **CQ MEDICAL** ที่ **+1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 หรือ SUPPORT@CQMEDICAL.COM**

ตัวต่อได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, CURVE™ Board และ BoS™ Headframe

คำเตือนการใช้งานทั่วไป


อุปกรณ์ไม่ควรยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงเมื่อใช้ตัวต่อ CT ต่อไปนี้

- RT-4527LTOMO (หน้า 7)
- RT-4529M (หน้า 20)
- RT-4527MTPCT (หน้า 22)
- RT-4527EXA475 (หน้า 34)
- RT-4527PETCT (หน้า 36)

การยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงอาจทำให้อุปกรณ์ตกจากพื้นเตียงและทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527LMI3

ตัวต่อ ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ และเครื่องฉายรังสี
เกลียวหมุน

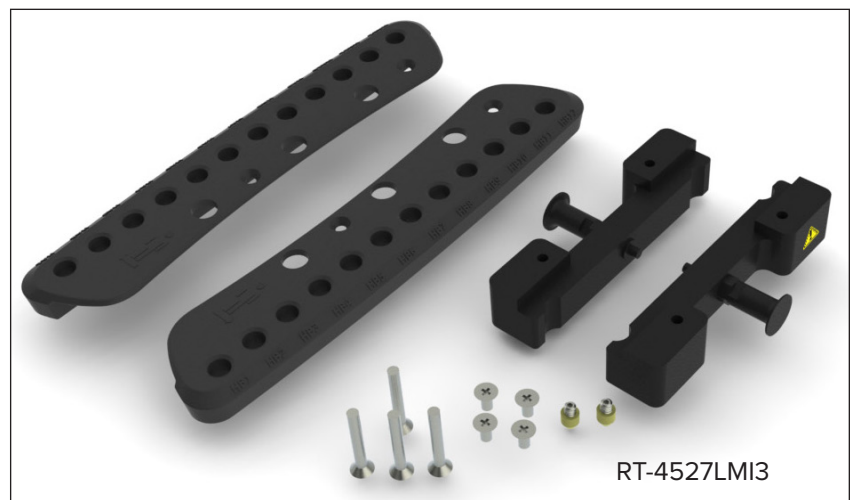

เครื่องมือที่จำเป็น: ไคควงหัวแฉกของ Phillips



! คำเตือน ! ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากอุปกรณ์หนีบระหว่างตัวต่อของอุปกรณ์กับพื้นเตียงเมื่อใช้แรงกดเหนือแนวเส้นแจ้งเตือน

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527LMI3


! หมายเหตุ ! หากติดตั้งบนอุปกรณ์ที่มีความหนา 28 มม. เช่น Encompass™ โปรดดูหน้า 38 สำหรับการติดตั้งแผ่นซึมก่อนดำเนินการติดตั้งต่อ

1. ติดตั้งตัวต่อเข้ากับชุดด้ามจับแต่ละชุดโดยใช้สกรู (แต่ละตัว) ขนาด ¼-20 x 1 ½" 2 ตัว (รูปที่ 1)
2. ติดตั้งตัวต่อระบุตำแหน่งทรงกรวยสี่เหลี่ยมที่ด้านล่างของอุปกรณ์โดยตรง (ติดตั้งหนึ่งตัวที่แต่ละด้าน) (รูปที่ 2 และ 2a)
3. ติดตั้งชุดด้ามจับเข้ากับอุปกรณ์โดยเว้นระยะห่างระหว่างสองรู 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรู (แต่ละตัว) ขนาด ¼-20 x ½" 2 ตัว (รูปที่ 3)


! หมายเหตุ ! อาจเกิดอันตรายจากอุปกรณ์หนีบระหว่างตัวต่อของอุปกรณ์กับพื้นเตียงเมื่อใช้แรงกดเหนือแนวเส้นแฉ่งเตือน

! หมายเหตุ ! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งชุดด้ามจับ โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ชุดด้ามจับ

4. วางอุปกรณ์บนพื้นเตียงโดยจัดตำแหน่งให้ตัวต่อทรงกรวยสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกับรูอ้างอิงตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวด้านบนของพื้นเตียงบิดและดึงสลักเพื่อติดตั้ง/ปลดอุปกรณ์บนพื้นเตียง

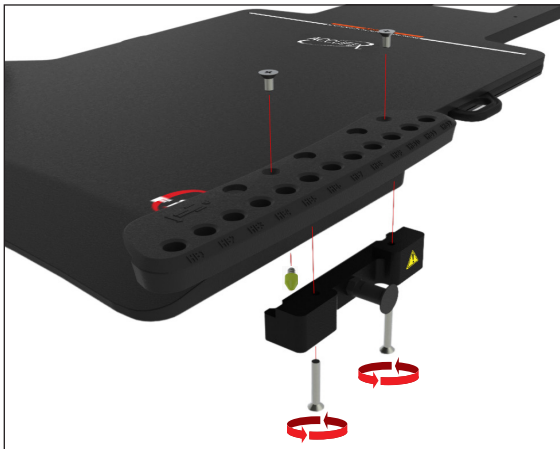


รูปที่ 1

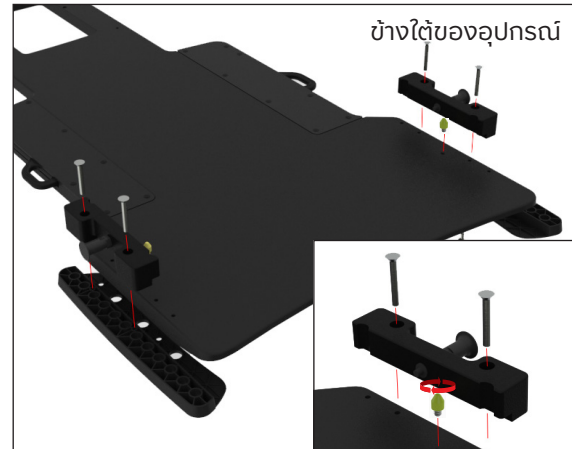

รูปที่ 2

รูปที่ 2a

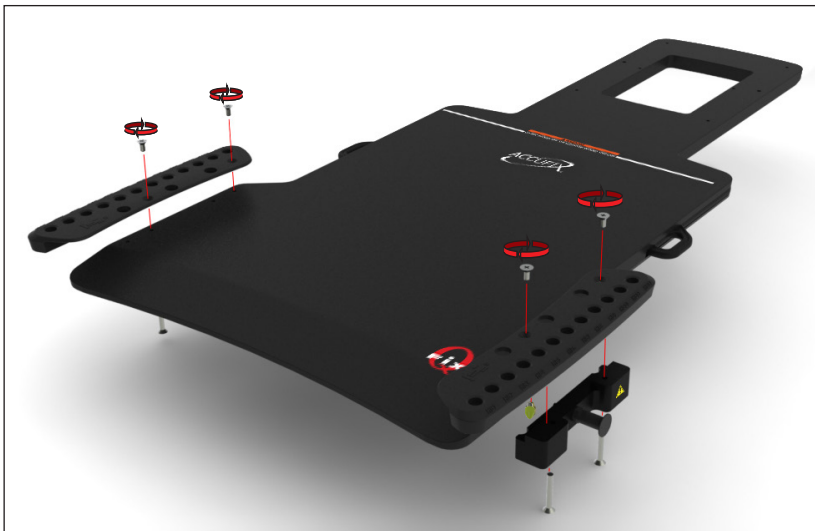

รูปที่ 3

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527LTOMO



! คำเตือน ! **ไม่ควรให้อุปกรณ์ยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงเมื่อใช้ตัวต่อนี้เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ตกจากพื้นเตียงและทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ**

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527LTOMO

1. ติดตั้งตัวต่อระบุตำแหน่งทรงกรวยสี่เหลี่ยมที่ด้านล่างของอุปกรณ์โดยตรง (ติดตั้งหนึ่งตัวที่แต่ละด้าน) (รูปที่ 4 และ 5)
2. วางอุปกรณ์บนพื้นเตียงโดยจัดตำแหน่งให้ตัวต่อทรงกรวยสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกับรูอ้างอิงตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวด้านบนของพื้นเตียง




รูปที่ 4



รูปที่ 5

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527MI

ตัวต่อ ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ และเครื่องฉายรังสี
เกลียวหมุน

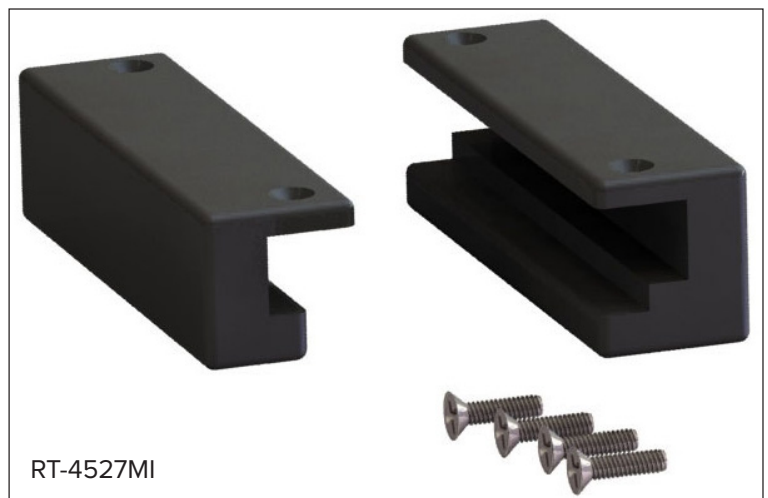

เครื่องมือที่จำเป็น: ไขควงหัวแฉกของ Phillips

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527MI


1. ติดตั้งตัวต่อที่ด้านหนึ่งของอุปกรณ์ในตำแหน่งที่แสดงด้านล่างโดยใช้สกรู (แต่ละตัว) ขนาด ¼-20 x ½" 2 ตัว (รูปที่ 6)

! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ตัวต่อใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะป็นรูชุดใด


2. ทำขั้นตอนการติดตั้งซ้ำสำหรับตัวต่ออีกด้านหนึ่ง (รูปที่ 7)

3. วางแถบระบุตำแหน่งที่มีหมุด 2 ตัวในตำแหน่งที่ต้องการ (เมื่อติดตั้งหมุดระบุตำแหน่งแล้ว หมุดจะตรงกับรูข้างใต้ของอุปกรณ์) (รูปที่ 6, 7 และ 8)

4. ติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นเตียงโดยเกี่ยวตัวต่อขนาดใหญ่สองตัวเข้ากับพื้นเตียงก่อน จากนั้นจึงติดตั้งตัวต่อขนาดเล็กและระบุตำแหน่งโดยแถบระบุตำแหน่งที่มีหมุด 2 ตัว

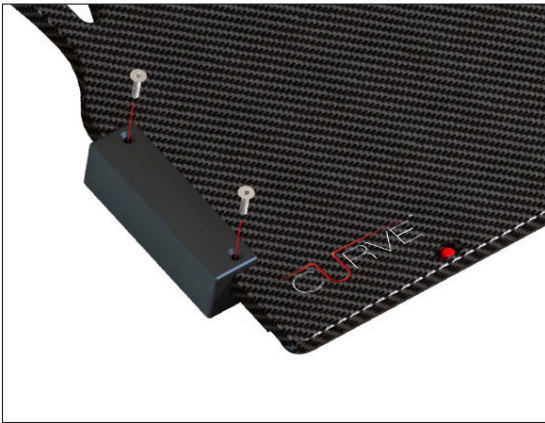

รูปที่ 6

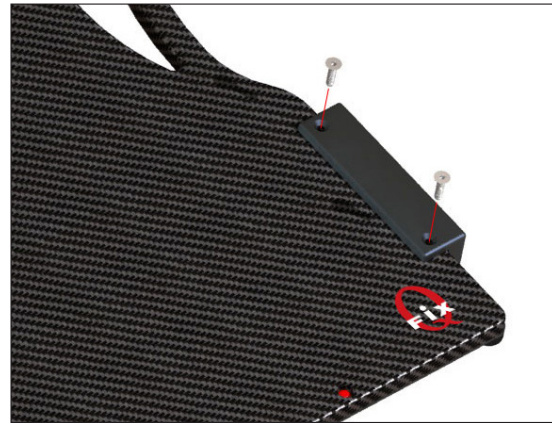



รูปที่ 7



รูปที่ 8

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527EXAG

ตัวต่อ VARIAN EXACT®

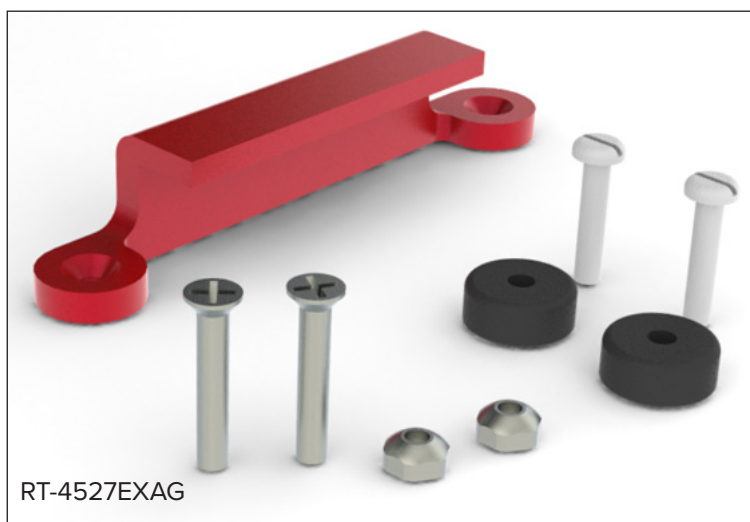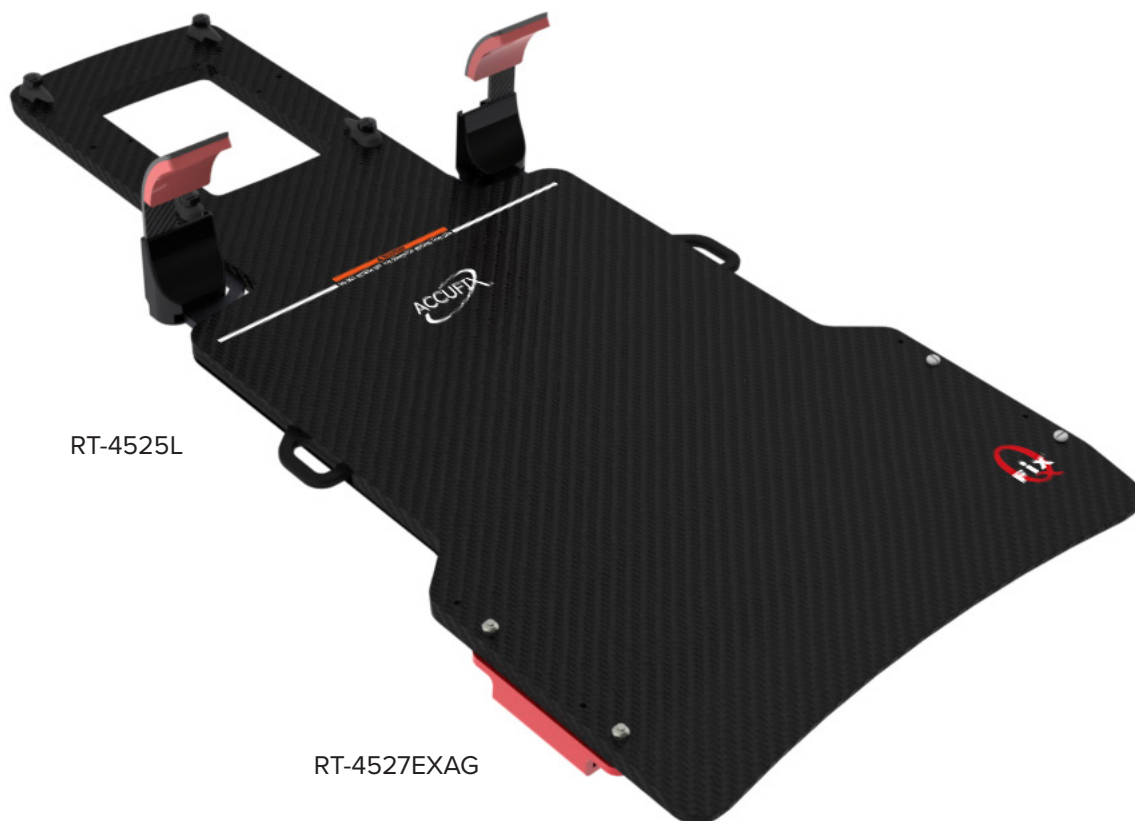

เครื่องมือที่จำเป็น: ไชคองหัวแฉกของ Philips และไชคองหัวแบน

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527EXAG

1. ติดตั้งตัวต่อสีแดงเข้ากับอุปกรณ์ในรูสองรูที่เว้นระยะห่าง 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูขนาด 1/4-20 x 1 3/8" 2 ตัว จากนั้นติดตั้งน็อต
มีรภัยขนาด 1/4-20 จำนวน 2 ตัวเข้ากับสกรูจากด้านบนของอุปกรณ์ (รูปที่ 9)


! หมายเหตุ ! สามารถติดตั้งตัวต่อได้ทั้งทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของอุปกรณ์ หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้ชุดที่ตัวต่อใช้ได้
ไม่สำคัญว่าจะเป็นรูชุดใด

2. ติดตั้งดิสก์ระบุตำแหน่ง 2 ตัวที่ด้านตรงข้ามของตัวต่อระบุตำแหน่งในรูที่ตรงกันโดยใช้สกรู 1/4-20 x 1 1/4" (สกรู 1 ตัวต่อดิสก์ระบุ
ตำแหน่ง) (รูปที่ 10)

3. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยเกี่ยวตัวต่อสีแดงไว้บนด้านหนึ่ง จากนั้นดันด้านที่มีดิสก์ระบุตำแหน่งลงไปในห้องอ้างอิงตำแหน่ง
จนกว่าจะแน่น



รูปที่ 9

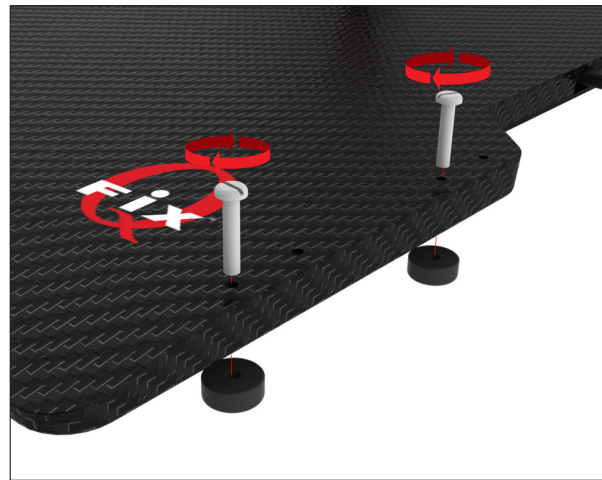

รูปที่ 10



รูปที่ 11

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527QFIX

ตัวต่อ QFIX™ KVUE™ และ QUANTUM™



เครื่องมือที่จำเป็น: ไส้ควงหัวแฉกของ Philips และไส้ควงหัวแบน

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527QFIX

1. ติดตั้งตัวต่อเข้ากับอุปกรณ์ในรูสองรูที่อยู่ห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูขนาด $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{4}$ " จำนวน 2 ตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนของตัวต่อที่มีส่วนยื่นหันเข้าด้านใน เพื่อให้สามารถล็อกเข้ากับขอบของอุปกรณ์ Qfix ได้ (รูปที่ 12)


! หมายเหตุ ! สามารถติดตั้งตัวต่อได้ทั้งทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของอุปกรณ์ หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้ชุดที่ตัวต่อใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นรูชุดใด

2. ติดตั้งดิสก์ระบุตำแหน่ง 2 ตัวที่ด้านตรงข้ามของตัวต่อระบุตำแหน่งในรูที่ตรงกันโดยใช้สกรู $\frac{1}{4}$ -20 x $1\frac{1}{4}$ " (สกรู 1 ตัวต่อดิสก์ระบุตำแหน่ง) (รูปที่ 13)

3. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยเกี่ยวตัวต่อไว้บนด้านหนึ่งของพื้นเตียง จากนั้นดันด้านที่มีดิสก์ระบุตำแหน่งลงไปในร่องอ้างอิงตำแหน่งจนกว่าจะแน่น



รูปที่ 12

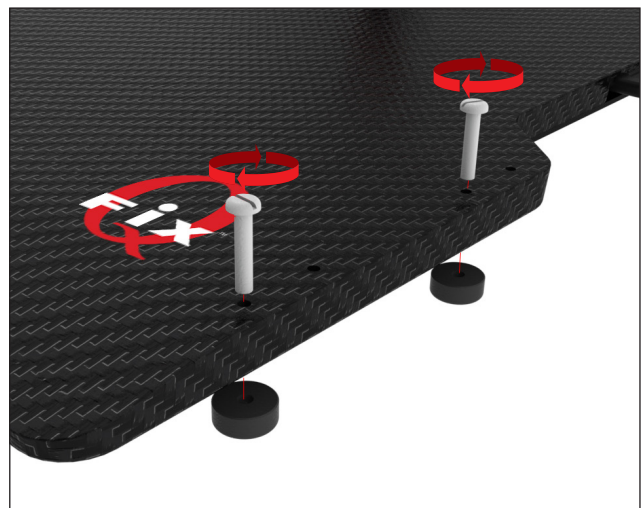


รูปที่ 13



รูปที่ 14

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

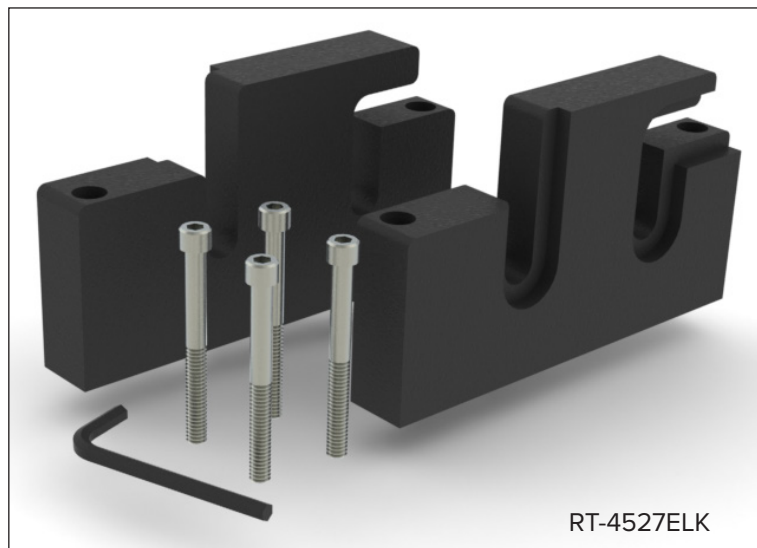

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527ELK


1. ติดตั้งตัวต่อเพื่อให้พื้นผิวเรียบอยู่ด้านนอกอุปกรณ์และให้ตัวต่ออยู่ในตำแหน่งที่แสดงด้านล่างในรูสองรูที่เว้นระยะห่าง 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูหัวจมขนาด ¼-20 x 2 ½" 2 ตัวที่ให้มากับประแจแอล (รูปที่ 14)

! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ตัวต่อใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นการรูชุดใด

2. ทำขั้นตอนการติดตั้งซ้ำสำหรับตัวต่ออีกด้านหนึ่ง โดยให้ด้านที่เรียบของตัวต่อหันออกด้านนอก (รูปที่ 15)
3. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยเกี่ยวตัวต่อเข้ากับตัวยึดบนรางอุปกรณ์เสริม



รูปที่ 15

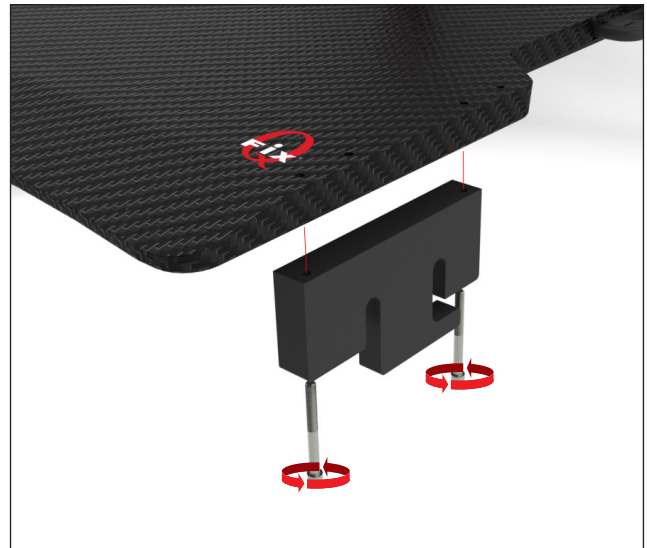

รูปที่ 16



รูปที่ 17

การติดตั้งตัวต่อ RT-4529M

VARIAN EXACT® ที่ใช้ร่วมกับ CT ได้



เครื่องมือที่จำเป็น: ไชคองหัวแบน



อุปกรณ์ไม่ควรยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงเมื่อใช้ตัวต่อ CT นี้ การยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงอาจทำให้
อุปกรณ์ตกลงจากพื้นเตียงและทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ


การติดตั้งตัวต่อ RT-4529M

1. ติดตั้งดิสก์ระบุตำแหน่ง 2 ตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งของอุปกรณ์ในรูสองรูที่เว้นระยะห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรู ¼-20 x 1 ¼" (สกรู 1 ตัวต่อดิสก์ระบุตำแหน่ง) (รูปที่ 17)


! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ดิสก์ใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะป็นรูชุดใด

2. ติดตั้งดิสก์ระบุตำแหน่งที่เหลืออยู่ 2 ตัวที่ด้านตรงข้ามตามดิสก์คู่แรกในรูที่ตรงกัน โดยใช้สกรูขนาด ¼-20 x 1 ¼" (สกรู 1 ตัวต่อดิสก์ระบุตำแหน่ง) (รูปที่ 18)

3. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยจัดตำแหน่งดิสก์ให้ตรงกับร่องอ้างอิงตำแหน่ง กดลงบนอุปกรณ์จนกว่าจะแน่นสนิท

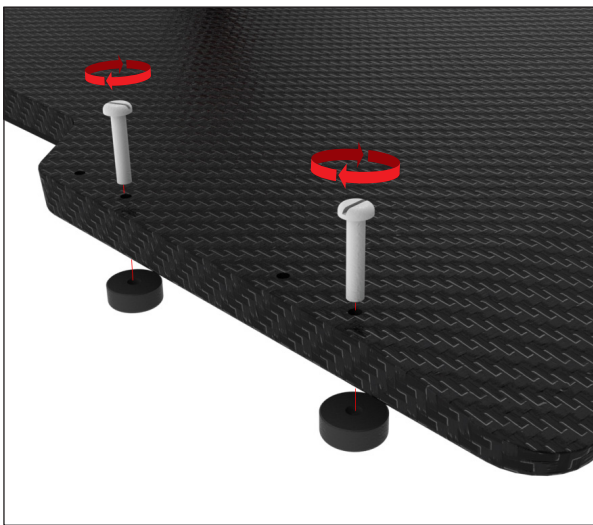

รูปที่ 18

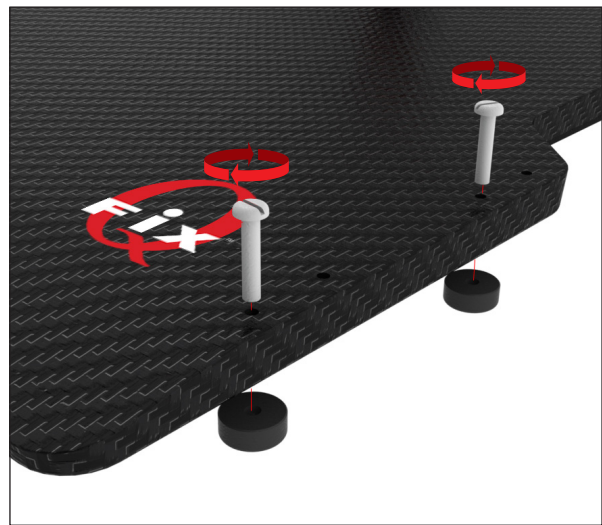


รูปที่ 19



รูปที่ 20

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527MTPCT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ CT

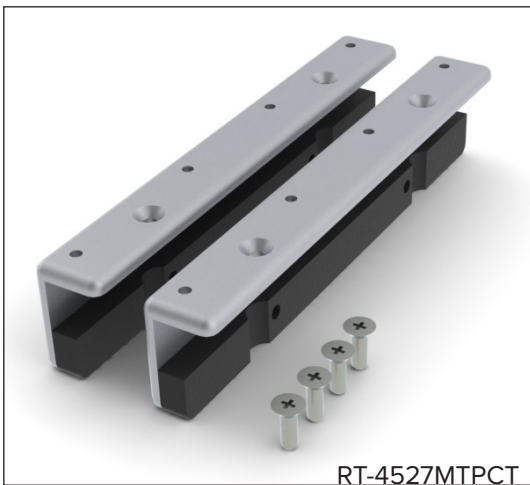

เครื่องมือที่จำเป็น: ไส้ควงหัวແຂກຂອງ Philips



อุปกรณ์ไม่ควรยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงเมื่อใช้ตัวต่อ CT นี้ การยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงอาจทำให้
อุปกรณ์ตกลงจากพื้นเตียงและทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527MTPCT

1. ติดตั้งตัวต่อในตำแหน่งที่แสดงด้านล่างในรูสองรูที่เว้นระยะห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูขนาด 1/4-20 x 3/4" 2 ตัว (รูปที่ 20 และ 21)


! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ตัวต่อใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นการติดตั้ง

2. ทำขั้นตอนการติดตั้งสำหรับตัวต่ออีกด้านหนึ่ง โดยให้ด้านที่เรียบของตัวต่อหันออกด้านนอก

3. ติดตั้งอุปกรณ์โดยจัดตำแหน่งตัวต่อให้ตรงกับจุดอ้างอิงตำแหน่งที่ด้านข้างของพื้นเตียง กดลงบนอุปกรณ์จนกว่าจะแน่นสนิท



รูปที่ 21

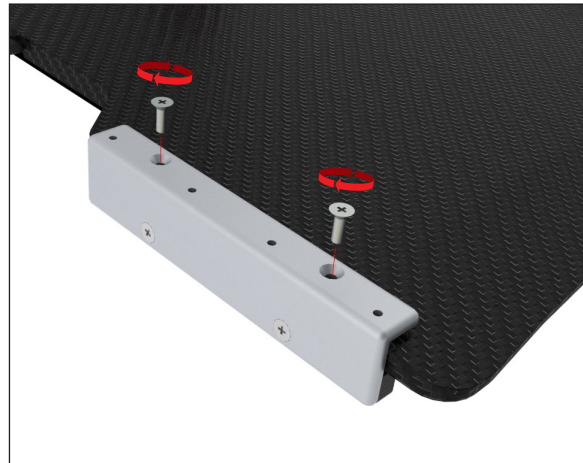


รูปที่ 22



รูปที่ 23


การติดตั้งตัวต่อ RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

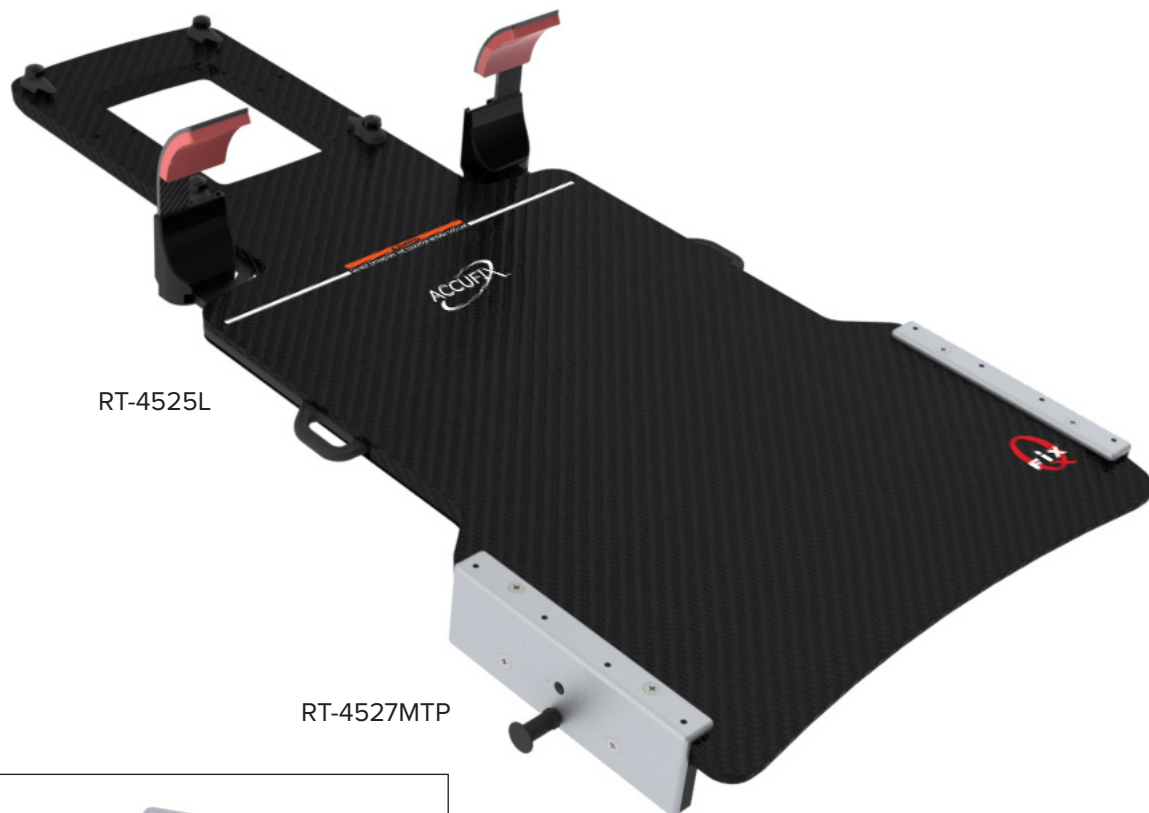

RT-4525L

RT-4527MTP

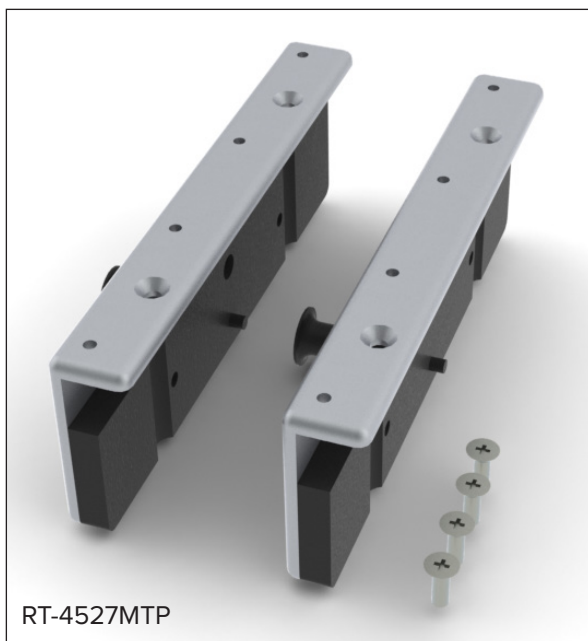

RT-4527MTP

เครื่องมือที่จำเป็น: ไบควงหัวแฉกของ Philips

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527MTP

1. ติดตั้งตัวต่อในตำแหน่งที่แสดงด้านล่างในรูสองรูที่เว้นระยะห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูขนาด 1/4-20 x 3/4" 2 ตัว (รูปที่ 24 และ 25)

! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ตัวต่อใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นการติดตั้ง

2. ทำขั้นตอนการติดตั้งสำหรับตัวต่ออีกด้านหนึ่ง

3. ติดตั้งอุปกรณ์โดยจัดตำแหน่งตัวต่อให้ตรงกับจุดอ้างอิงตำแหน่งที่ด้านข้างของพื้นเตียง ปิดและดึงสลักเพื่อติดตั้ง/ปลดอุปกรณ์บนพื้นเตียง



รูปที่ 24




รูปที่ 25



รูปที่ 26

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

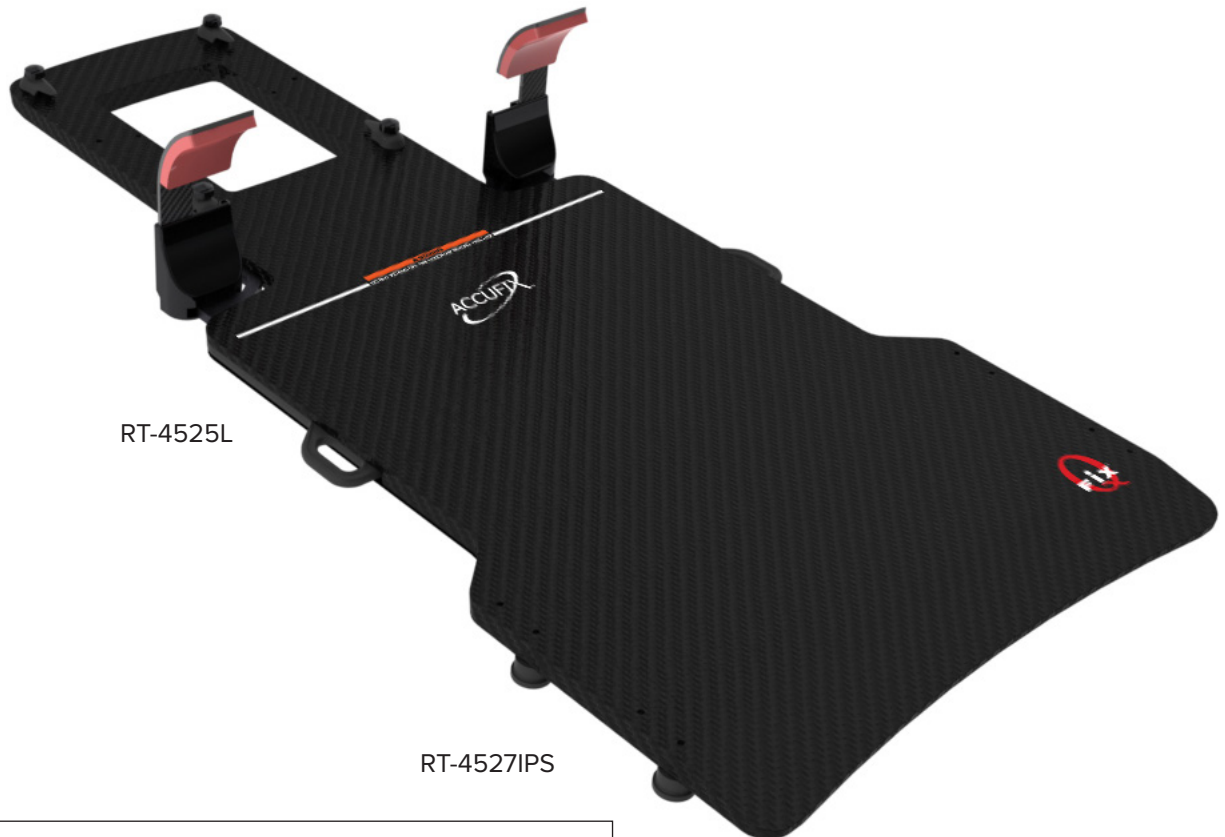


การติดตั้งตัวต่อ RT-4527IPS

1. ติดตั้งดิสก์ระบุตำแหน่ง 2 ตัว (แบบมีขอบ) ที่ด้านใดด้านหนึ่งของอุปกรณ์ในรูสองรูที่เว้นระยะห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูขนาด $\frac{1}{4}$ -20 x 1 $\frac{1}{4}$ " (สกรู 1 ตัวต่อดิสก์ระบุตำแหน่ง) (รูปที่ 27)


! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ดิสก์ใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะป็นรูชุดใด

2. ติดตั้งดิสก์ระบุตำแหน่งที่เหลืออยู่ 2 ตัว (แบบไม่มีขอบ) ที่ด้านตรงข้ามตามดิสก์คู่แรกในรูที่ตรงกันโดยใช้สกรูขนาด $\frac{1}{4}$ -20 x 1 $\frac{1}{4}$ " (สกรู 1 ตัวต่อดิสก์ระบุตำแหน่ง) (รูปที่ 28)

3. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยจัดแนวดิสก์ให้ตรงกับร่องอ้างอิงตำแหน่งแล้วเกี่ยวดิสก์ที่มีขอบเข้ากับพื้นเตียงก่อน กดลงเข้าที่ อีกด้านหนึ่งจนอุปกรณ์แน่นสนิท

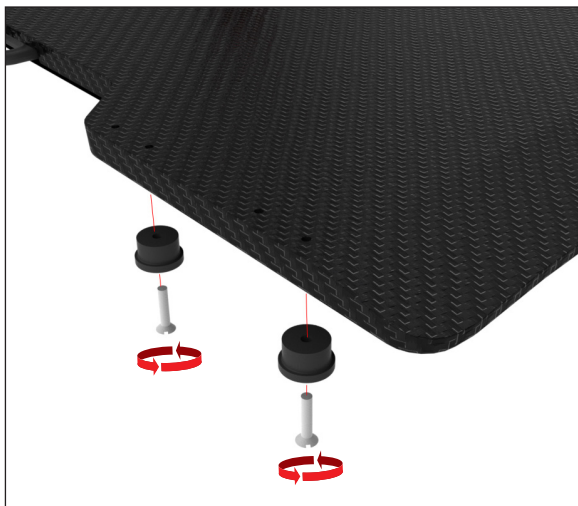

รูปที่ 27

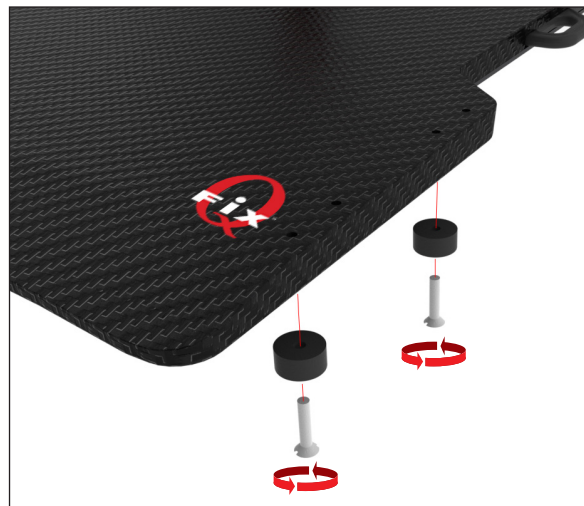


รูปที่ 28



รูปที่ 29

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT

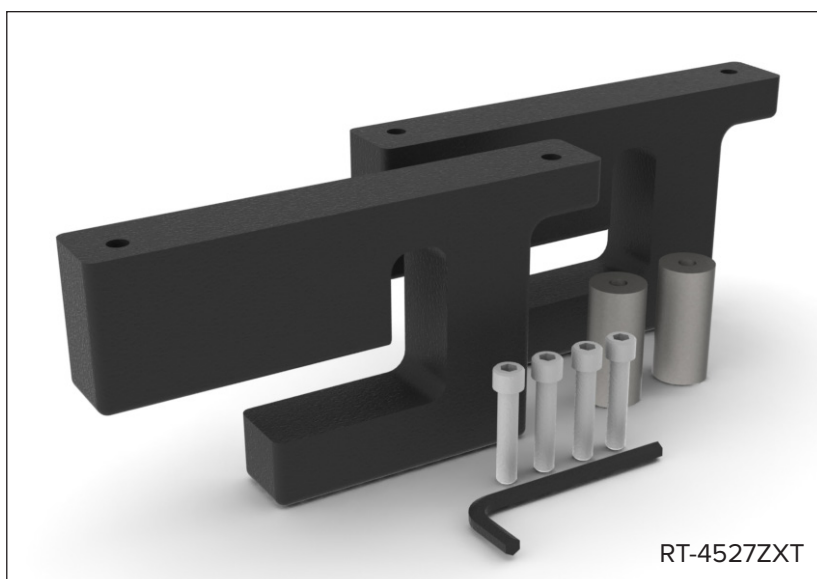





การติดตั้งตัวต่อ RT-4527ZXT

1. เปลี่ยนตัวยึดหัวเหลี่ยมบนเตียง ZXT เป็นตัวยึดหัวกลมที่ให้มา (รูปที่ 30)
2. ติดตั้งตัวต่อในตำแหน่งที่แสดงด้านล่างในรูสองรูที่เว้นระยะห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูหัวจมนขนาด 1/4-20 x 1 1/4" 2 ตัวที่ให้มากับประแจแอล (รูปที่ 31)

! หมายเหตุ ! มีตัวต่อด้านขวาและด้านซ้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อติดตั้งแล้ว ตัวต่ออยู่ในระนาบเดียวกับด้านข้างของอุปกรณ์ (รูปที่ 32)

! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ติดสกรูไว้ได้ ไม่สำคัญว่าจะป็นรูชุดใด

3. ทำขั้นตอนการติดตั้งซ้ำสำหรับตัวต่ออีกด้านหนึ่ง (รูปที่ 33)
4. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยเกี่ยวตัวต่อเข้ากับตัวยึดบนรางอุปกรณ์เสริม (รูปที่ 34)

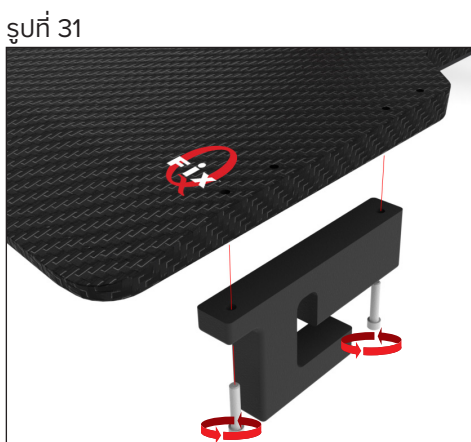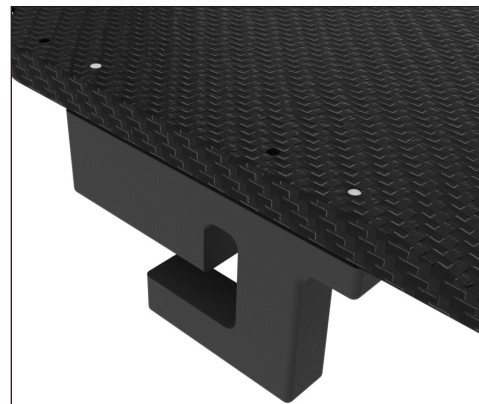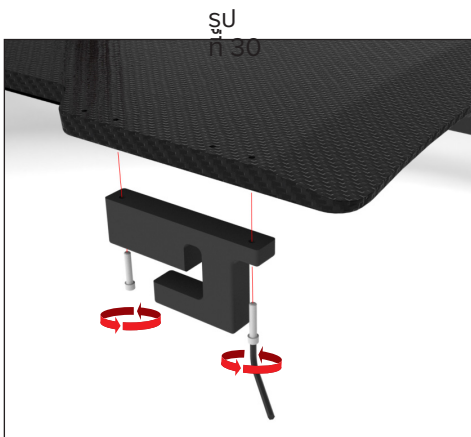
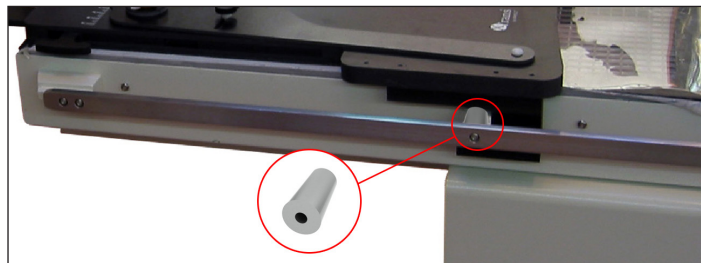


รูปที่ 33

รูปที่ 34

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527SKD

SIEMENS KD

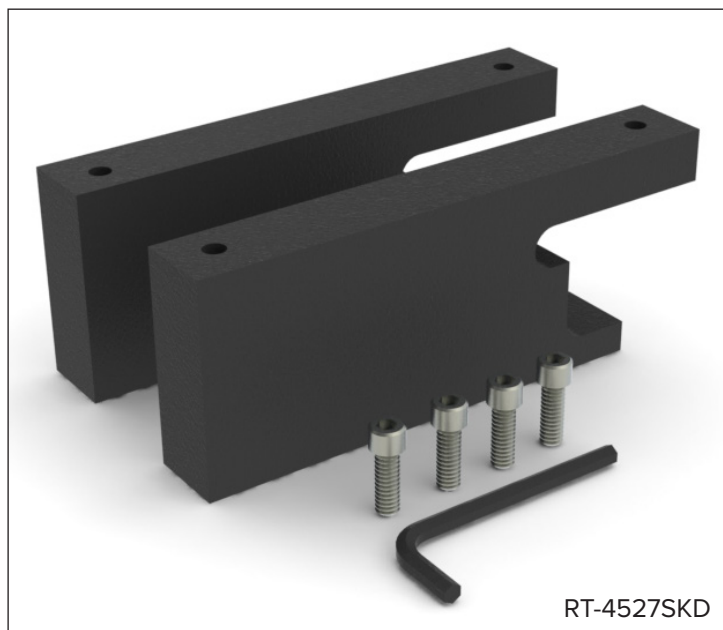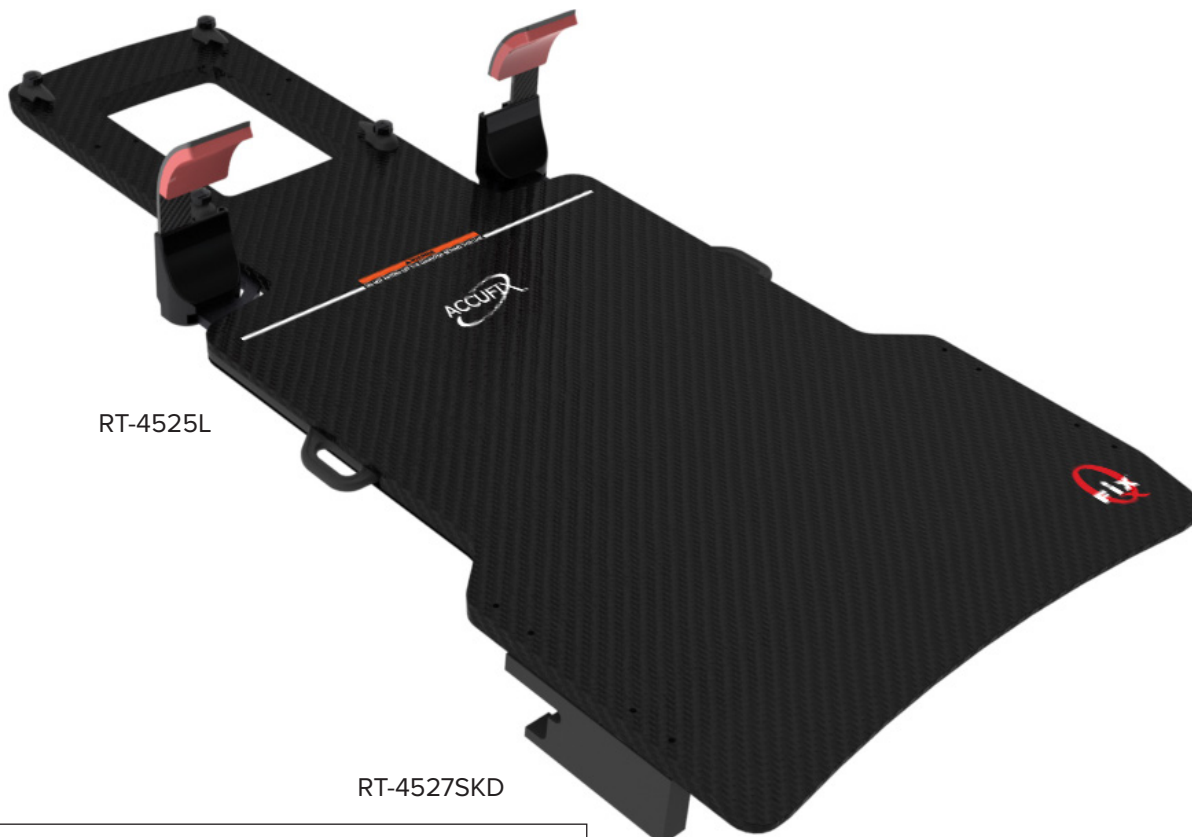

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527SKD


1. ติดตั้งตัวต่อในตำแหน่งที่แสดงด้านล่างในรูสองรูที่เว้นระยะห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูหัวจมนขนาด 1/4-20 x 3/4" 2 ตัวที่ให้มา กับประแจแอล (รูปที่ 35)

! หมายเหตุ ! มีตัวต่อด้านขวาและด้านซ้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อติดตั้งแล้ว ตัวต่ออยู่ในระนาบเดียวกับด้านข้างของอุปกรณ์ (รูปที่ 36)


! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ดีสกรูใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะป็นรูชุดใด

2. ทำขั้นตอนการติดตั้งซ้ำสำหรับตัวต่ออีกด้านหนึ่ง (รูปที่ 37)

3. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยเกี่ยวตัวต่อเข้ากับตัวยึดบนรางอุปกรณ์เสริม

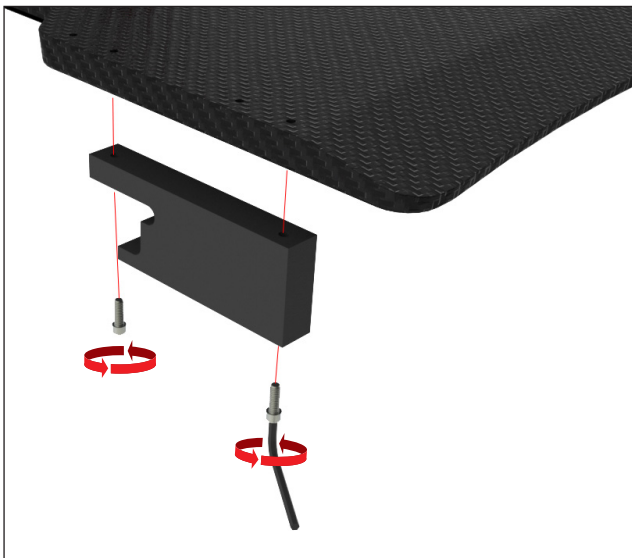

รูปที่ 35

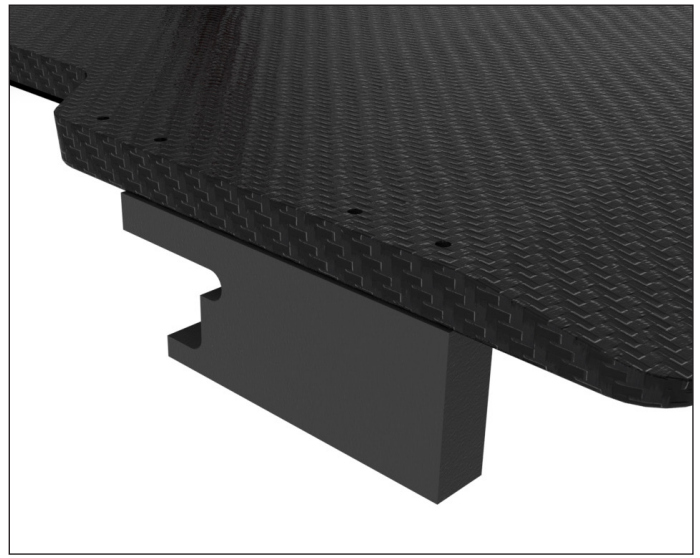

รูปที่ 36




รูปที่ 37



รูปที่ 38

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527ETRJ

VARIAN ETR

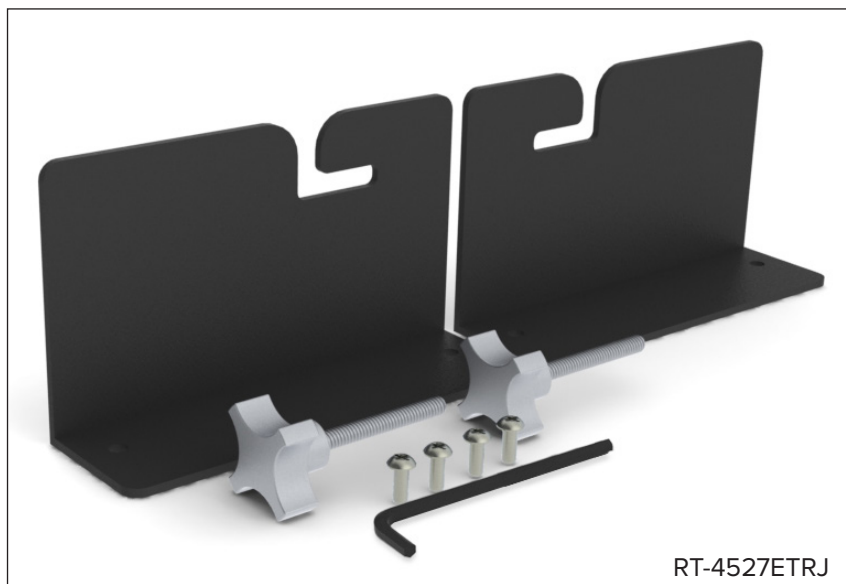

RT-4527ETRJ

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527ETRJ


1. ถอดสกรูแอลตัวที่สามออกจากปลายส่วนบนของเตียง ETR โดยใช้ประแจแอลที่ให้มา (รูปที่ 39)
2. ทำซ้ำกับด้านตรงข้ามของเตียง
3. เปลี่ยนสกรูแอลเป็นปุ่มหมุนที่ให้มา ปุ่มหมุนนี้ควรอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเตียงอย่างถาวร อย่าขันปุ่มหมุนจนแน่น เว้นไว้ให้ขยับได้ประมาณ 0.5 ซม. (รูปที่ 40)
4. ทำซ้ำกับด้านตรงข้ามของเตียง
5. ติดตั้งตัวต่อในตำแหน่งที่แสดงด้านล่างในรูสองรูที่เว้นระยะห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูขนาด $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ " 2 ตัว (รูปที่ 41)
- ! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ติดสกรูไว้ได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นการติดตั้ง**
6. ทำขั้นตอนการติดตั้งซ้ำสำหรับตัวต่ออีกด้านหนึ่ง (รูปที่ 42)
7. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยเกี่ยวตัวต่อเข้ากับเพลลาของปุ่มหมุน ขันปุ่มหมุนให้แน่นเพื่อยึด (รูปที่ 43)




รูปที่ 39




รูปที่ 40

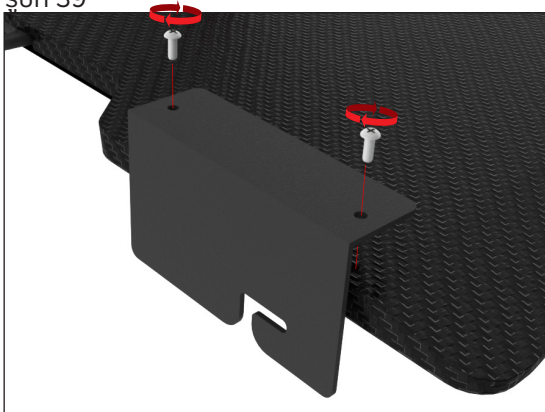

รูปที่ 41

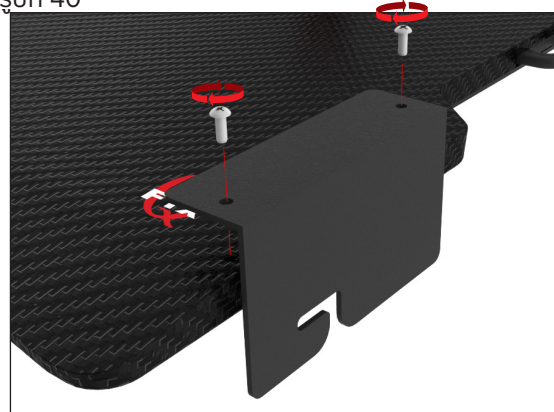

รูปที่ 42

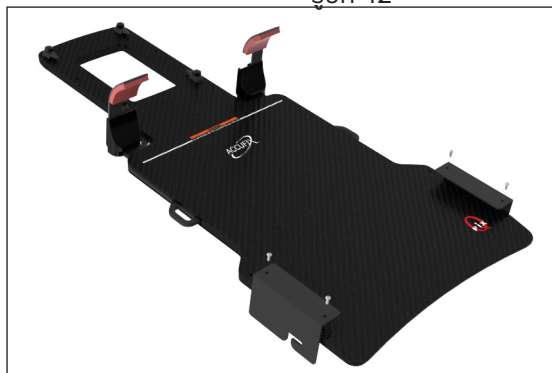

รูปที่ 43


การติดตั้งตัวต่อ RT-4527EXA475

แผ่นปู CT สำหรับใช้อ้างอิงตำแหน่ง กว้าง 500 มม. NARROW EXACT®



RT-4525L

RT-4527EXA475

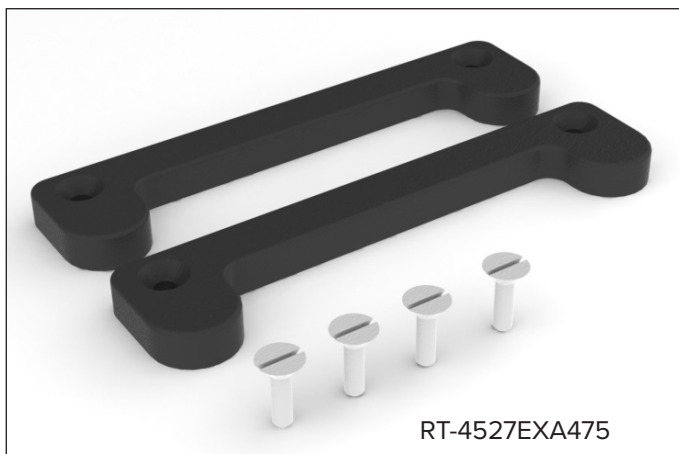

RT-4527EXA475

เครื่องมือที่จำเป็น: ไขควงหัวแบน




**อุปกรณ์ไม่ควรยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงเมื่อใช้ตัวต่อ CT นี้ การยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงอาจทำให้
อุปกรณ์ตกลงจากพื้นเตียงและทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ**

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527EXA475

1. ติดตั้งตัวต่อในตำแหน่งที่แสดงด้านล่างในรูสองรูที่เว้นระยะห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูขนาด 1/4-20 x 3/4" 2 ตัว (รูปที่ 44)
! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ดีสกรูใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นรูชุดใด
2. ทำขั้นตอนการติดตั้งซ้ำสำหรับตัวต่ออีกด้านหนึ่ง (รูปที่ 45)
3. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยจัดตัวต่อให้ตรงกับร่องอ้างอิงตำแหน่ง กดลงบนอุปกรณ์จนกว่าจะแน่นสนิท



รูปที่ 44

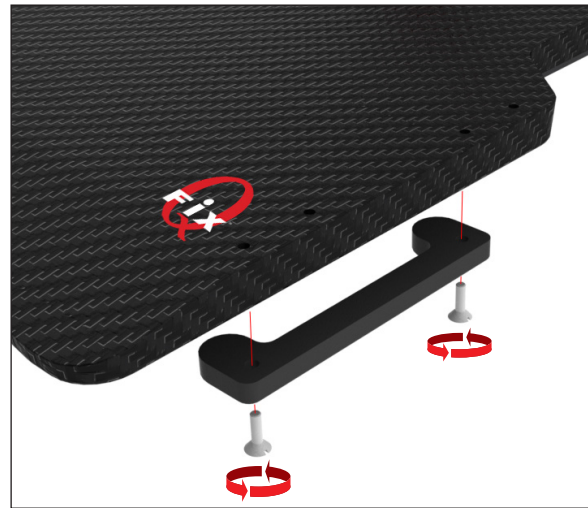


รูปที่ 45



รูปที่ 46

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527PETCT

แผ่นปู PET/CT กว้าง 480 มม. LS ของ PHILIPS GEMINI™ และ GE DISCOVERY™

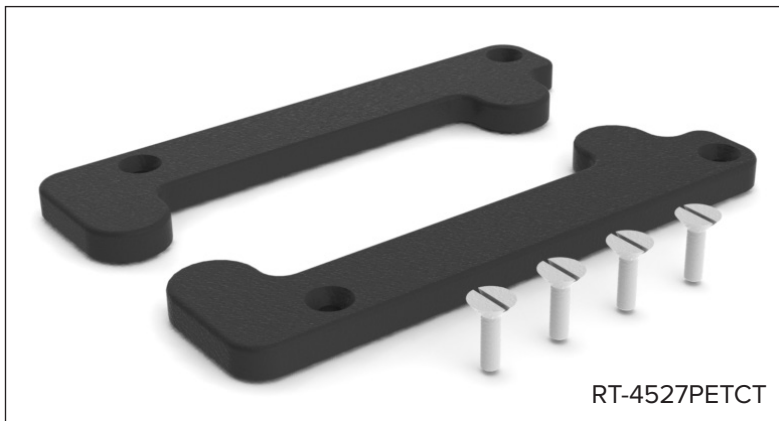

เครื่องมือที่จำเป็น: ไขควงหัวแบน



อุปกรณ์ไม่ควรยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงเมื่อใช้ตัวต่อ CT นี้ การยื่นออกไปเหนือปลายของพื้นเตียงอาจทำให้อุปกรณ์ตกจากพื้นเตียงและทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ

การติดตั้งตัวต่อ RT-4527PETCT

1. ติดตั้งตัวต่อในตำแหน่งที่แสดงด้านล่างในรูสองรูที่เว้นระยะห่างกัน 140 มม. (5.5") โดยใช้สกรูขนาด 1/4-20 x 3/4" 2 ตัว (รูปที่ 47)


! หมายเหตุ ! หากมีการติดตั้งชุดด้ามจับ ให้ใช้รูชุดที่ติดสกรูใช้ได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นรูชุดใด

2. ทำขั้นตอนการติดตั้งสำหรับตัวต่ออีกด้านหนึ่ง (รูปที่ 48)

3. ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับพื้นเตียงโดยจัดตัวต่อให้ตรงกับร่องอ้างอิงตำแหน่ง กดลงบนอุปกรณ์จนกว่าจะแน่นสนิท



รูปที่ 47

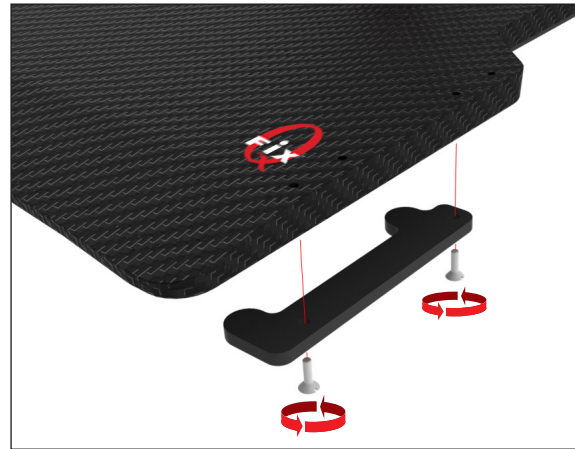

รูปที่ 48



รูปที่ 49

การติดตั้งแผ่นซีม RT-4527PETCT

RT-4527EXA (รูปที่ 50)

1. ถอดสกรู 2 ตัวที่ยึดตัวต่อเข้ากับชุดด้ามจับออก
2. วางแผ่นซีมไว้ระหว่างตัวต่อและชุดด้ามจับ โดยจัดให้รูของสกรูตรงกับรูบนแผ่นซีม
3. ใส่สกรูสองตัวกลับเข้าที่และขันให้แน่น
4. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งต่อไป

RT-4527LMI3 (รูปที่ 51)

1. ถอดสกรู 2 ตัวที่ยึดตัวต่อเข้ากับชุดด้ามจับออก
2. วางแผ่นซีมไว้ระหว่างตัวต่อและชุดด้ามจับ โดยจัดให้รูของสกรูตรงกับรูบนแผ่นซีม
3. ใส่สกรูสองตัวกลับเข้าที่และขันให้แน่น
4. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งต่อไป



รูปที่ 50



รูปที่ 51



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com