
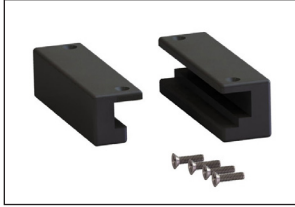
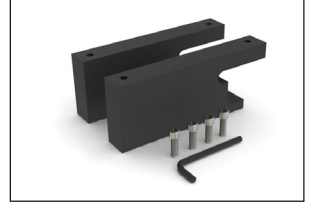
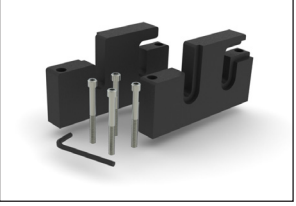
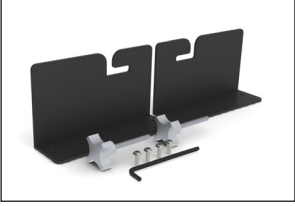
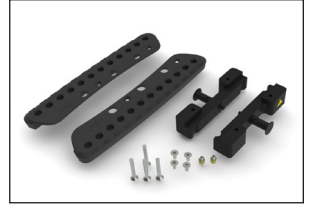
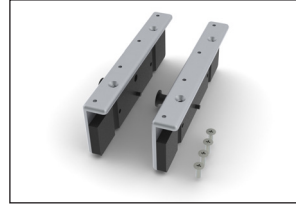
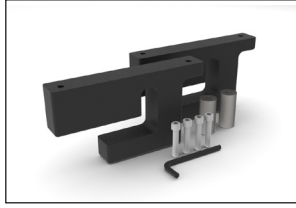
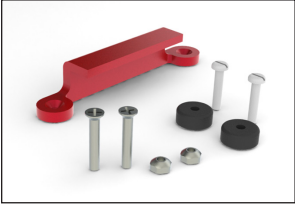


ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

İndeksleme Adaptörleri

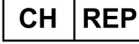

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass ve Hand Grip Array; Qfix şirketinin ticari markalarıdır.

Exact® ve ETR®, Varian Medical Systems şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Medical Intelligence I-Beam, Elekta AB şirketinin ticari markası ve Precise®, Elekta AB şirketinin tescilli ticari markasıdır.

ZXT ve TXT, Siemens AG şirketinin ticari markalarıdır.

Med-Tec Prodigy ve IPPS, Civco Medical Solutions şirketinin ticari markalarıdır.

Gemini, Philips Medical Systems şirketinin ticari markasıdır.

Discovery, GE Medical şirketinin ticari markasıdır.

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

Sembollerin listesi ve tanımları için CQmedical.com sitesine bakın.

! UYARI ! BU EKİPMANDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. BU CİHAZIN HERHANGİ BİR PARÇASI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA DÜZGÜN ÇALIŞMAZSA DERHAL KULLANMAYI BIRAKIN VE +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 NUMARALI TELEFONDAN VEYA SUPPORT@CQMEDICAL.COM ADRESİNDEN CQ MEDICAL İLE İLETİŞİME GEÇİN.

Adaptörler; Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, CURVE™ Board ve BoS™ Headframe ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.

GENEL KULLANIM UYARISI

Aşağıdaki BT adaptörleri kullanılırken cihaz, yatak üstünün ucundan dışarı SARKMAMALIDIR:


- RT-4527LTOMO (sf. 7)
- RT-4529M (sf. 20)
- RT-4527MTPCT (sf. 22)
- RT-4527EXA475 (sf. 34)
- RT-4527PETCT (sf. 36)

Yatak üstünün ucundan dışarı sarkması, cihazın yatak üstünden düşmesine ve hastanın yaralanmasına neden olabilir.

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527LMI3

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ VE TOMOTERAPİ
ADAPTÖRÜ

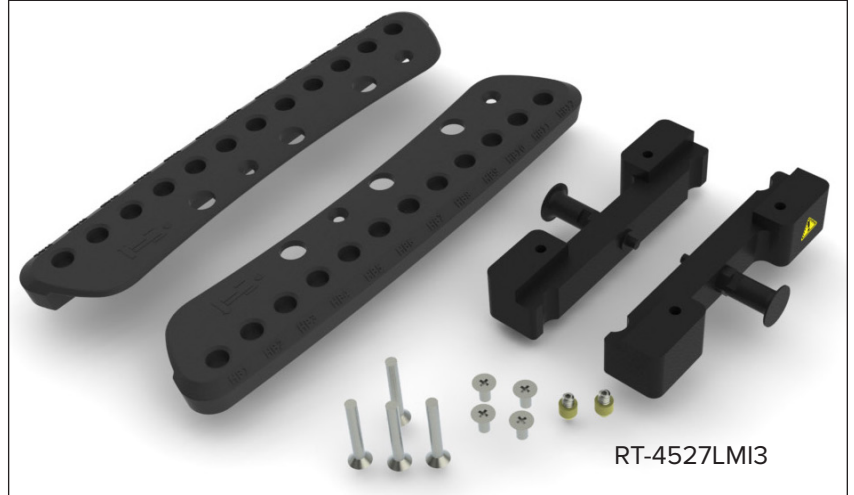

Gerekli Araçlar: Yıldız Tornavida



! UYARI ! UYARI ÇİZGİSİNİN ÜZERİNE BASINÇ UYGULANDIĞINDA CİHAZ ADAPTÖRÜ İLE YATAK ÜSTÜ ARASINDA BİR SIKIŞMA NOKTASI OLUŞABİLECEĞİNDEN DİKKATLİ OLUN.

4

KURULUM KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI – 2002950_IFU, Indexing Adapters_TR

CQ Medical | +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 | www.CQmedical.com

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527LMI3


! NOT ! Encompass™ gibi 28 mm kalınlığında bir cihaza kurulum yapıyorsanız kurulum devam etmeden önce şim kurulumu için sayfa 38'e bakın.

1. Adaptörleri her bir Hand Grip Array'e 2 adet ¼-20 x 1 ½ inç vida (her biri için) kullanarak takın (Şekil 1).
2. Sarı koni yerleştirme adaptörünü doğrudan cihazın altına takın (her iki tarafa da bir tane takın). (Şekil 2 ve 2a)
3. Hand Grip Array'leri cihaza, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe 2 adet ¼-20 x ½ inç vida (her biri için) kullanarak takın. (Şekil 3)


! NOT ! Uyarı çizgisinin üzerine basınç uygulandığında cihaz adaptörü ile yatak üstü arasında bir Sıkışma Noktası oluşabilir.

! NOT ! Hand Grip Array'lerin kurulumu hakkında daha fazla bilgi için Hand Grip Array Ürün Rehberi ve Kullanım Kılavuzu'na bakın.

4. Sarı koniyi yatak üstünün üst yüzeyindeki indeksleme delikleriyle hizalayarak cihazı yatak üstünün üzerine yerleştirin. Cihazı yatak üstüne takmak/serbest bırakmak için pistonu döndürün ve çekin.

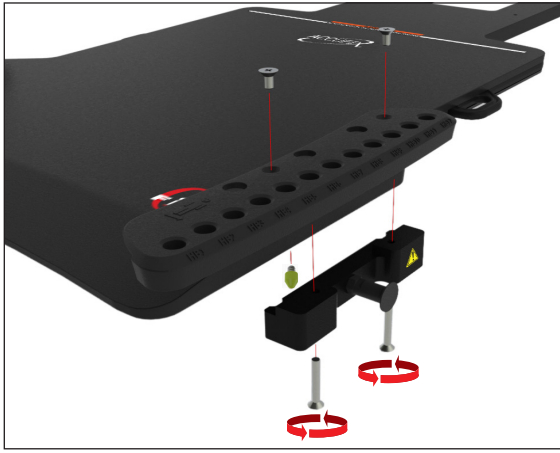


Şekil 1

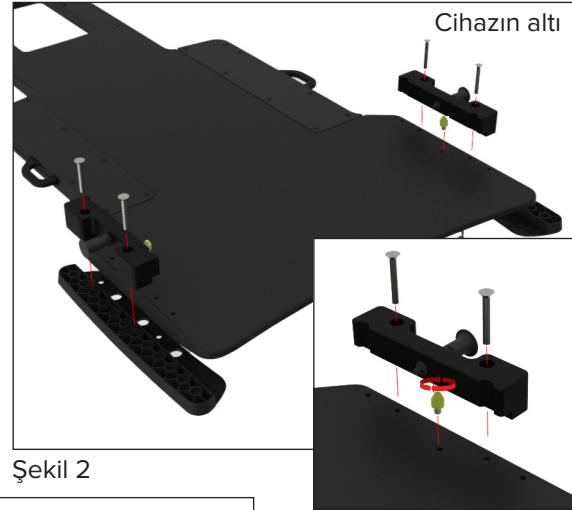

Şekil 2

Şekil 2a

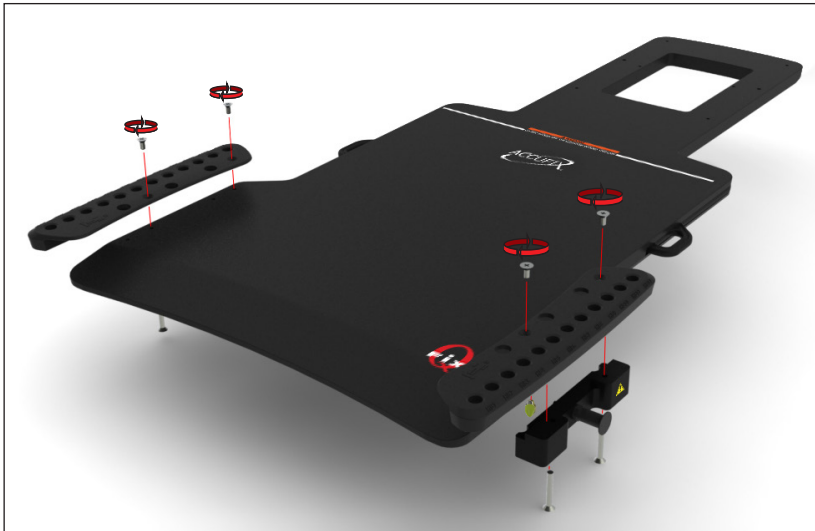

Şekil 3

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527LTOMO



! UYARI! BU ADAPTÖRÜ KULLANIRKEN CİHAZ, YATAK ÜSTÜNÜN UCUNDAN DIŞARI SARKMAMALIDIR; AKSİ TAKDİRDE CİHAZ YATAK ÜSTÜNDEN DÜŞEBİLİR VE HASTANIN YARALANMASINA NEDEN OLABİLİR.

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527LTOMO

1. Sarı koni yerleştirme adaptörünü doğrudan cihazın altına takın (her iki tarafa da bir tane takın) (Şekil 4 ve 5).
2. Sarı koniyi yatak üstünün üst yüzeyindeki indeksleme delikleriyle hizalayarak cihazı yatak üstünün üzerine yerleştirin.



Şekil 4




Şekil 5

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527MI

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ VE TOMOTERAPİ
ADAPTÖRÜ

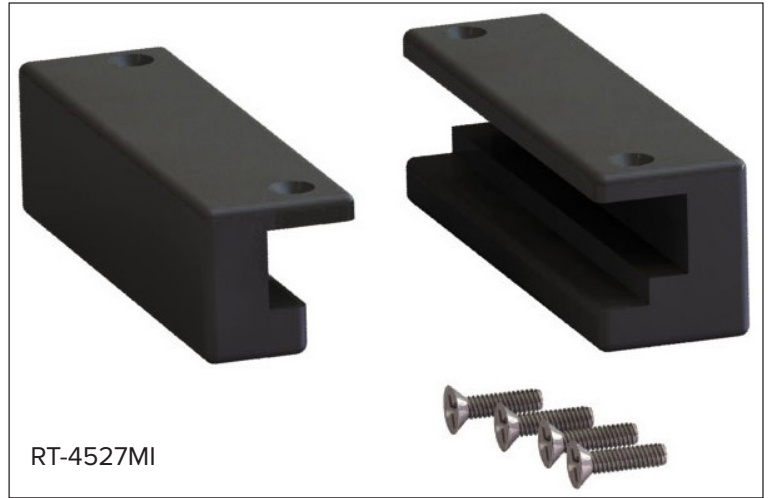

Gerekli Araçlar: Yıldız Tornavida

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527Mİ

1. Adaptörlerden birini 2 adet ¼-20 x ½ inç vida (her biri için) kullanarak aşağıda gösterilen konumda cihazın bir tarafına takın. (Şekil 6)

! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa adaptör için mevcut delik setini kullanın.


2. Diğer adaptör için kurulumu tekrarlayın (Şekil 7).

3. 2 pimli yerleştirme çubuğunu istenen konuma yerleştirin (takıldıktan sonra yerleştirme çubuğu pimleri cihazın altındaki deliklerle aynı hizaya gelecektir) (Şekil 6, 7 ve 8).

4. Önce iki adaptörden büyük olanını, ardından küçük adaptörü yatak üstüne asarak cihazı yatak üstüne takın ve 2 pimli yerleştirme çubuğunu kullanarak cihazın yerini belirleyin.



Şekil 6

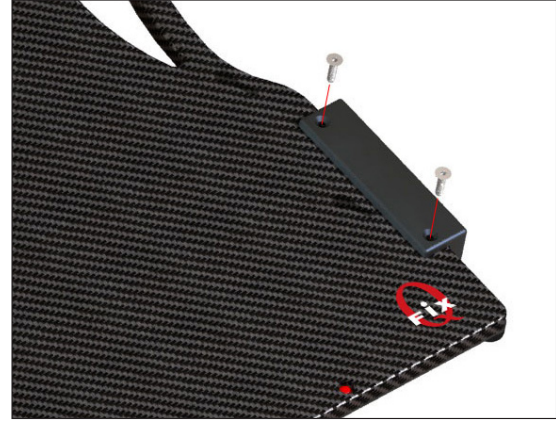

Şekil 7



Şekil 8

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527EXAG

VARIAN EXACT® ADAPTÖRÜ



RT-4525L

RT-4527EXAG

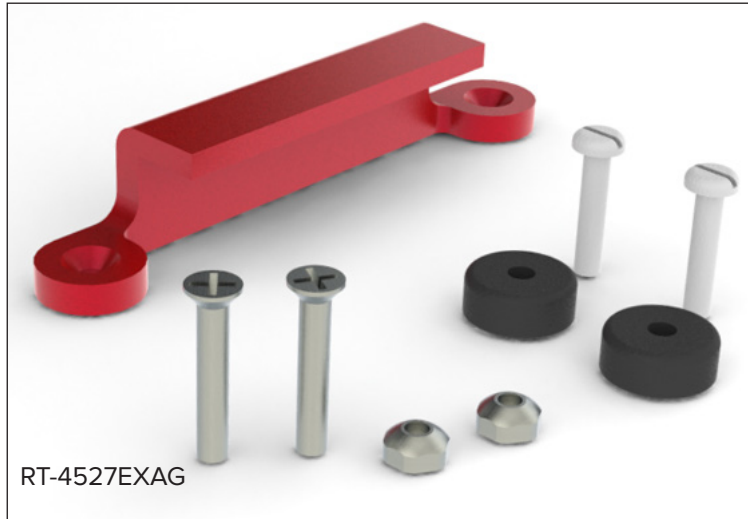

RT-4527EXAG

Gerekli Araçlar: Yıldız ve Düz Tornavida

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527EXAG

1. Kırmızı adaptörü cihaza, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe 2 adet ¼-20 x 1 ¾ inç vida kullanarak takın. Ardından 2 adet ¼-20 emniyet somununu cihazın üst tarafındaki vidalara takın (Şekil 9).


! NOT ! Adaptör, cihazın sağ veya sol tarafına takılabilir. Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa adaptör için mevcut delik setini kullanın.

2. Yerleştirme adaptörünün karşı tarafına, ilgili deliklere ¼-20 x 1 ¼ inç vidalar (her biri için 1 adet) kullanarak 2 Yerleştirme Diski takın (Şekil 10).

3. Kırmızı adaptörü bir tarafa takarak cihazı yatak üstüne monte edin, ardından yerleştirme disklerinin olduğu tarafı sabitleninceye kadar indeksleme çentiklerine doğru itin.

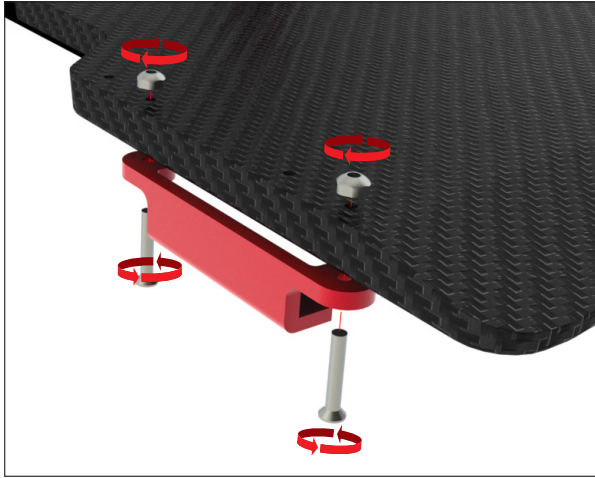

Şekil 9

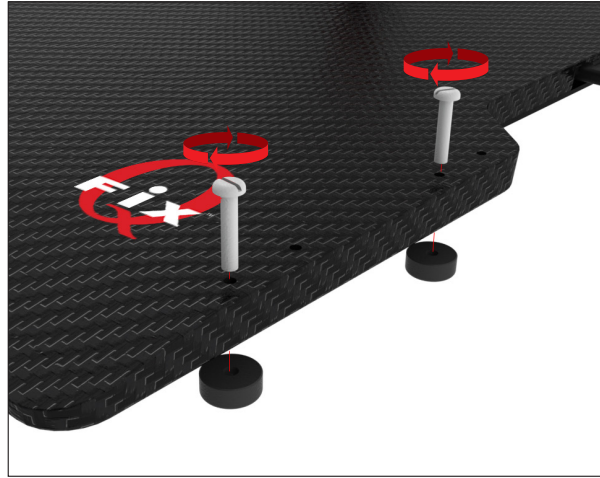

Şekil 10



Şekil 11

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527QFIX

QFIX™ KVUE™ VE QUANTUM™ ADAPTÖRÜ



Gerekli Araçlar: Yıldız ve Düz Tornavida

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527QFIX

1. Adaptörü cihaza, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe, 2 adet ¼-20 x ¾ inç vida kullanarak takın. Adaptörün çıkıntılı kısmının içe doğru baktığından emin olun, böylece Qfix cihazının kenarına kilitlenebilir (Şekil 12).


! NOT ! Adaptör, cihazın sağ veya sol tarafına takılabilir. Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa adaptör için mevcut delik setini kullanın.

2. Yerleştirme adaptörünün karşı tarafına, ilgili deliklere ¼-20 x 1 ¼ inç vidalar (her biri için 1 adet) kullanarak 2 yerleştirme diski takın (Şekil 13).

3. Adaptörü yatak üstünün bir tarafına asarak cihazı yatak üstünün üzerine takın, ardından yerleştirme disklerinin bulunduğu tarafı sabitleninceye kadar indeksleme çentiklerine doğru itin.

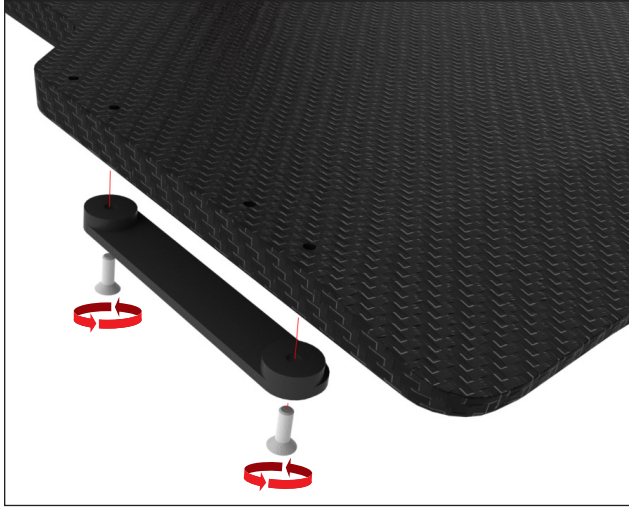

Şekil 12

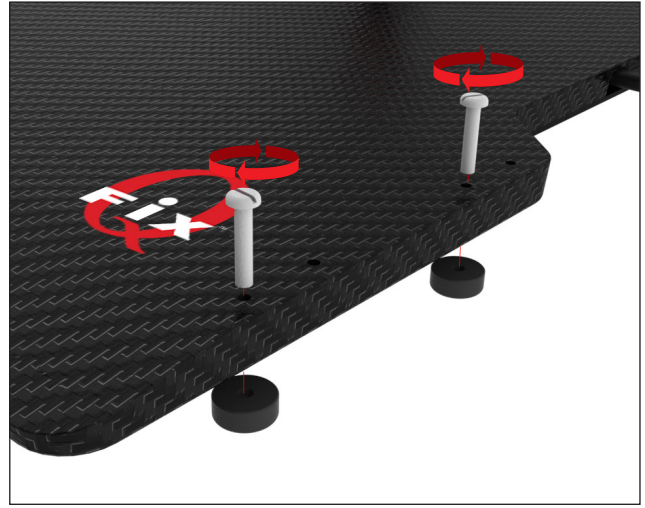

Şekil 13




Şekil 14

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

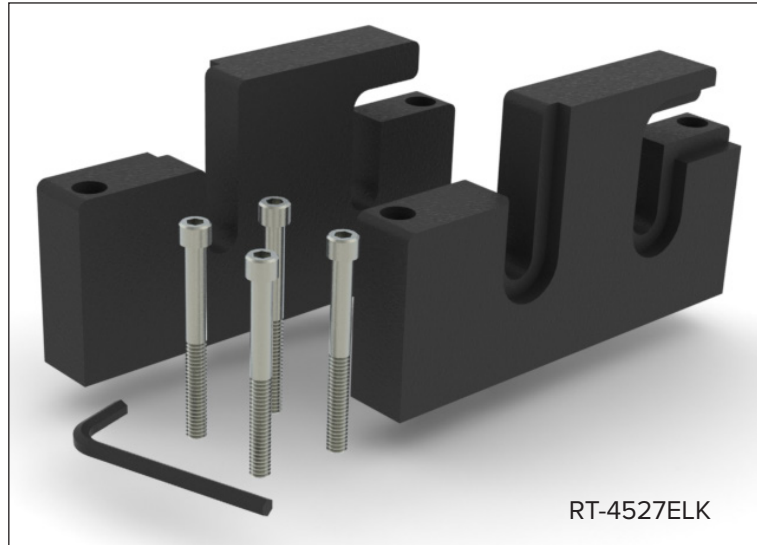

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527ELK

1. Adaptörü pürüzsüz yüzey cihazın dışında ve adaptör aşağıda gösterilen konumda olacak şekilde, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe birlikte verilen Aylan Anahtarıyla 2 adet ¼-20 x 2 ½ inç kapaklı vida kullanarak takın (Şekil 14).


! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa adaptör için mevcut delik setini kullanın.

2. Adaptörün düz tarafı dışa bakacak şekilde diğer adaptör için kurulumu tekrarlayın (Şekil 15).

3. Adaptörü aksesuar rayları üzerindeki dayanağa asarak cihazı yatak üstüne takın.

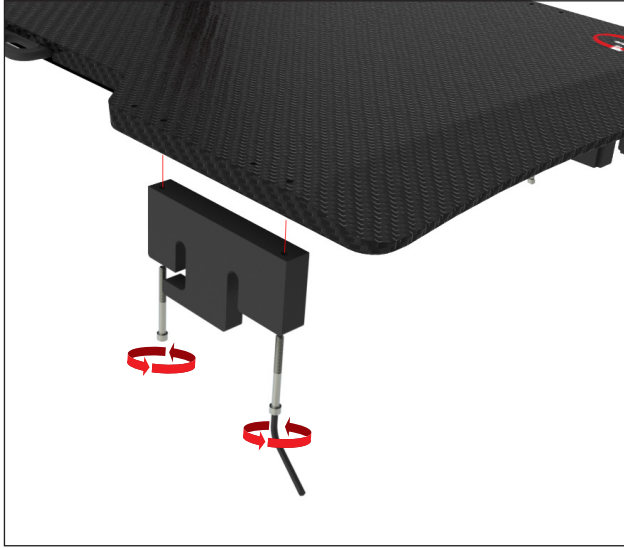

Şekil 15

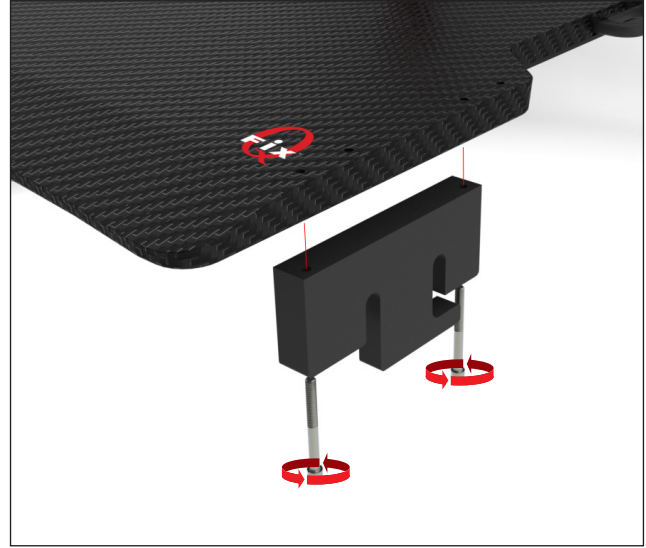

Şekil 16



Şekil 17

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4529M

VARIAN EXACT® UYUMLU BT



Gerekli Araçlar: Düz Tornavida



BU BT ADAPTÖRÜ KULLANILIRKEN CİHAZ, YATAK ÜSTÜNÜN UCUNDAN DIŞARI SARKMAMALIDIR. YATAK ÜSTÜNÜN UCUNDAN DIŞARI SARKMASI, CİHAZIN YATAK ÜSTÜNDEN DÜŞMESİNE VE HASTANIN YARALANMASINA NEDEN OLABİLİR.

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4529M

1. Cihazın her iki tarafına, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe ¼-20 x 1 ¼ inç vidalar (her biri için 1 adet) kullanarak 2 adet yerleştirme diski takın (Şekil 17).


! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa diskler için mevcut delik setini kullanın.

2. Kalan 2 yerleştirme diskini ilk iki diskin karşı tarafına, ilgili deliklere ¼-20 x 1 ¼ inç vidalar (her biri için 1 adet) kullanarak takın (Şekil 18).

3. Yerleştirme disklerini indeksleme çentikleriyle hizalayarak cihazı yatak üst kısmına takın. Cihaz sabitlenene kadar üzerine bastırın.

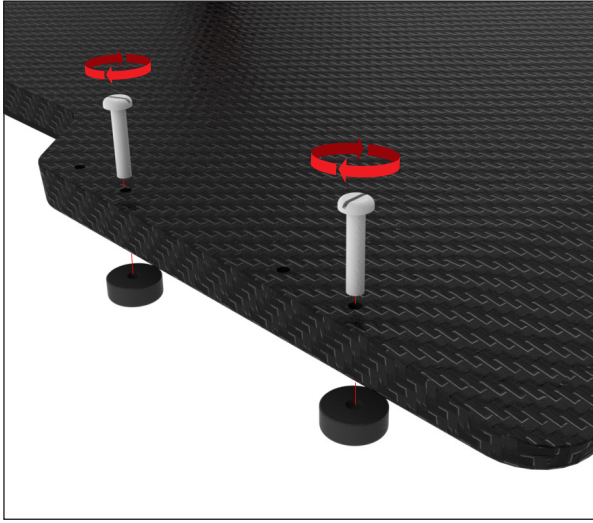

Şekil 18

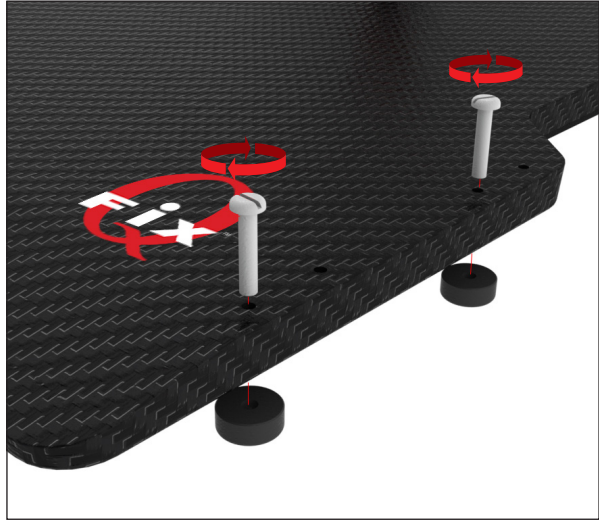

Şekil 19



Şekil 20

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527MTPCT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ CT



RT-4525L

RT-4527MTPCT

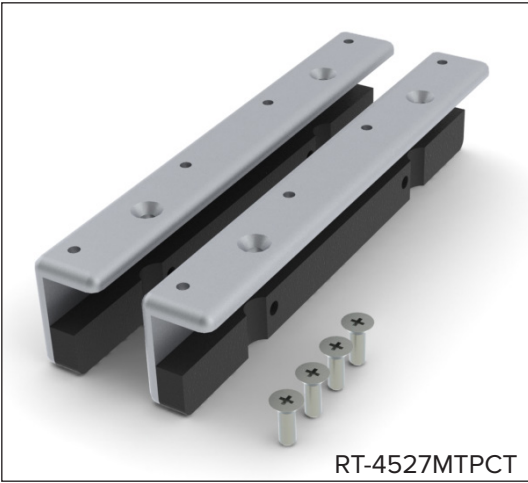

RT-4527MTPCT

Gerekli Araçlar: Yıldız Tornavida



BU BT ADAPTÖRÜ KULLANILIRKEN CİHAZ, YATAK ÜSTÜNÜN UCUNDAN DIŞARI SARKMAMALIDIR. YATAK ÜSTÜNÜN UCUNDAN DIŞARI SARKMASI, CİHAZIN YATAK ÜSTÜNDEN DÜŞMESİNE VE HASTANIN YARALANMASINA NEDEN OLABİLİR.

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527MTPCT

1. Adaptörü aşağıda gösterilen konuma, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe, 2 adet ¼-20 x ¾ inç vida kullanarak takın (Şekil 20 ve 21).

! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa adaptör için mevcut delik setini kullanın.

2. Adaptörün düz tarafı dışa bakacak şekilde diğer adaptör için kurulumu tekrarlayın.

3. Adaptörleri yatak başlığının yan tarafındaki indeksleme ile hizalayarak cihazı takın. Cihaz sabitlenene kadar üzerine bastırın.

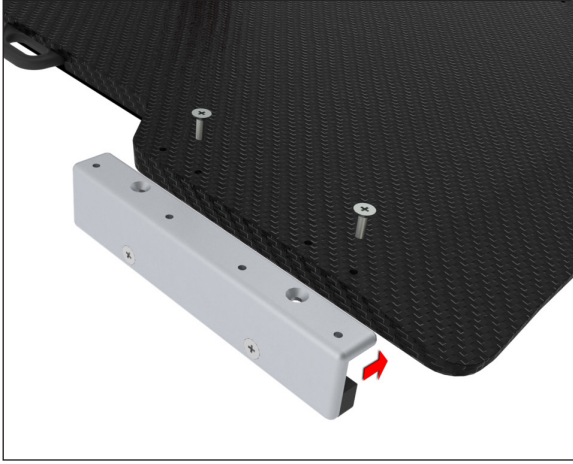

Şekil 21



Şekil 22



Şekil 23

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™



RT-4525L

RT-4527MTP

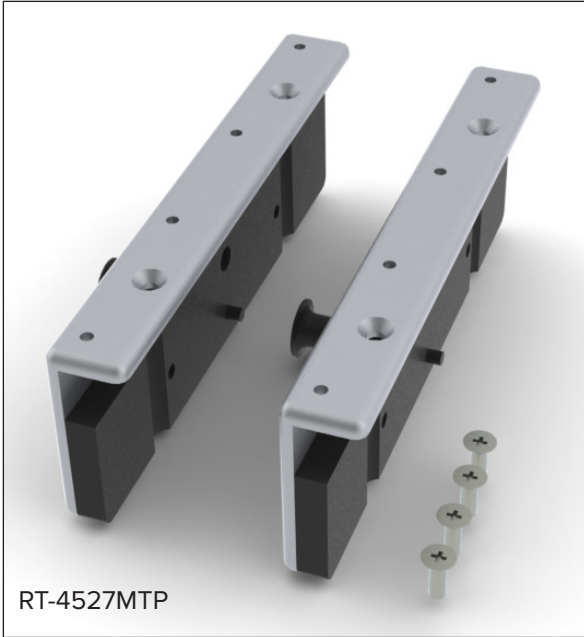

RT-4527MTP

Gerekli Araçlar: Yıldız Tornavida

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527MTP

1. Adaptörü aşağıda gösterilen konuma, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe, 2 adet ¼-20 x ¾ inç vida kullanarak takın (Şekil 24 ve 25).

! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa adaptör için mevcut delik setini kullanın.

2. Diğer adaptör için kurulumu tekrarlayın.

3. Adaptörleri yatak başlığının yan tarafındaki indeksleme ile hizalayarak cihazı takın. Cihazı yatak üstüne takmak/serbest bırakmak için Pistonu döndürün ve çekin.



Şekil 24



Şekil 25




Şekil 26

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527İPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

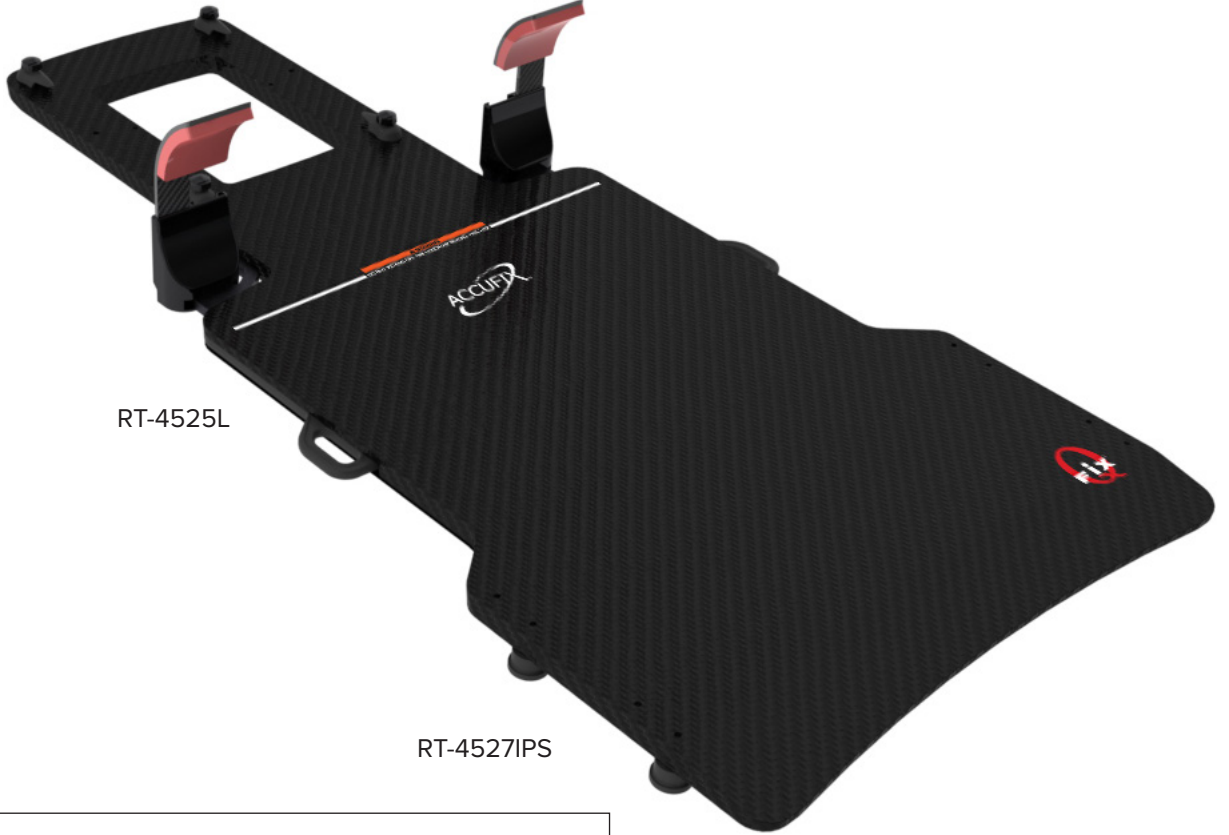

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527İPS

1. Cihazın her iki tarafına, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe ¼20 x 1 ¼ inç vidalar (her biri için 1 adet) kullanarak 2 adet yerleştirme diskini (kenarlı) takın (Şekil 27).

! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa diskler için mevcut delik setini kullanın.

2. Kalan 2 yerleştirme diskini (kenarsız) ilk iki diskin karşı tarafına, ilgili deliklere ¼-20 x 1 ¼ inç vidalar (her biri için 1 adet) kullanarak takın (Şekil 28).

3. Diskleri indeksleme çentikleriyle hizalayarak cihazı yatak üstüne takın, ardından önce üzerinde bir kenar bulunan diskleri yatak üstüne asın. Cihaz sabitleninceye kadar diğer tarafa bastırın.

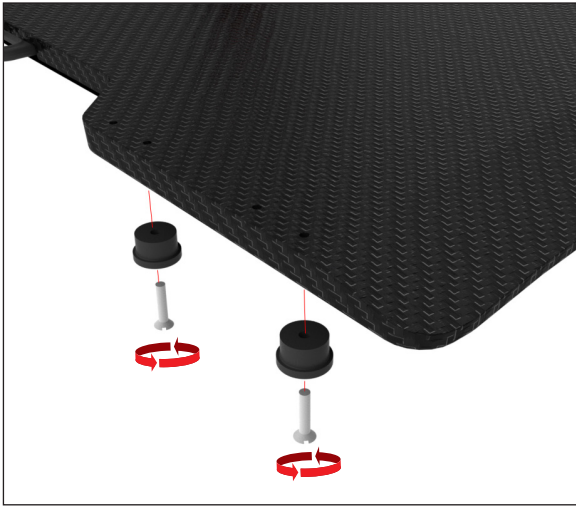

Şekil 27



Şekil 28




Şekil 29

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT

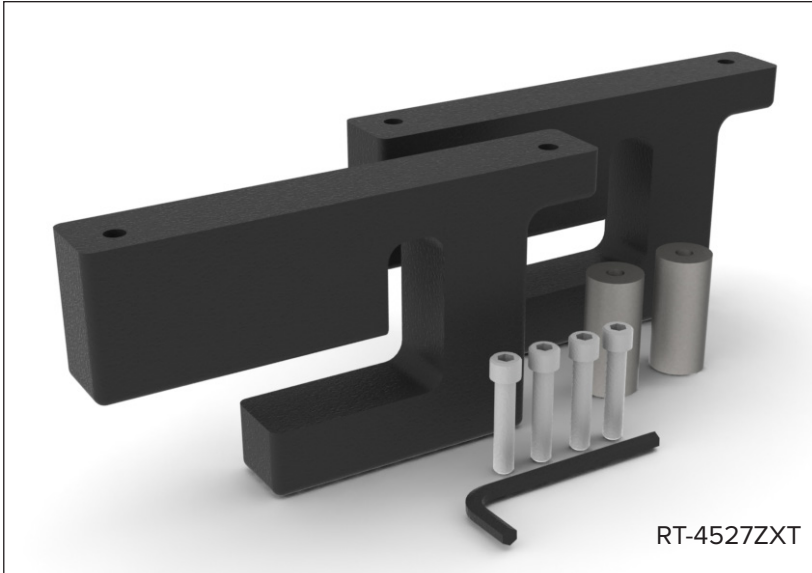

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527ZXT

1. ZXT Yatak üzerindeki kare şeklindeki desteği birlikte verilen yuvarlak destek ile değiştirin. (Şekil 30)
2. Adaptörü aşağıda gösterilen konuma, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe, birlikte verilen Alyan Anahtarıyla 2 adet ¼-20 x 1 ¼ inç kapaklı vida kullanarak takın (Şekil 31).


! NOT ! Bir sağ ve bir sol adaptör vardır; takıldıktan sonra adaptörün cihazın yan tarafıyla aynı hizada olduğundan emin olun. (Şekil 32).

! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa diskler için mevcut delik setini kullanın.


3. Diğer adaptör için kurulumu tekrarlayın (Şekil 33).
4. Cihazı adaptörü aksesuar raylarındaki dayanağa takarak yatak üstüne takın (Şekil 34).

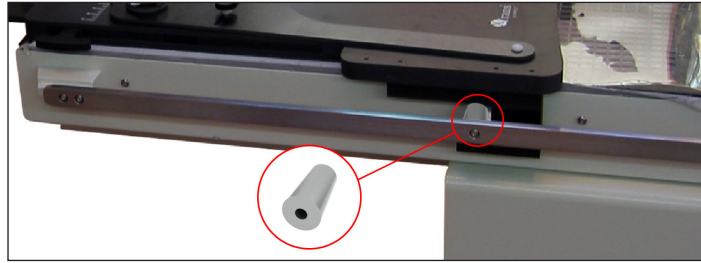


Şekil 30

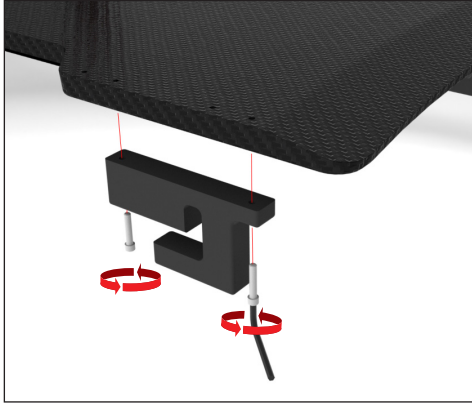

Şekil 31

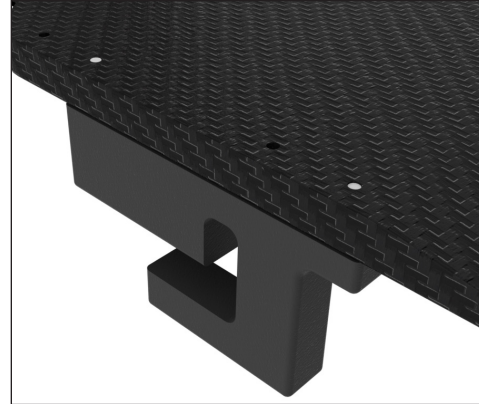

Şekil 32

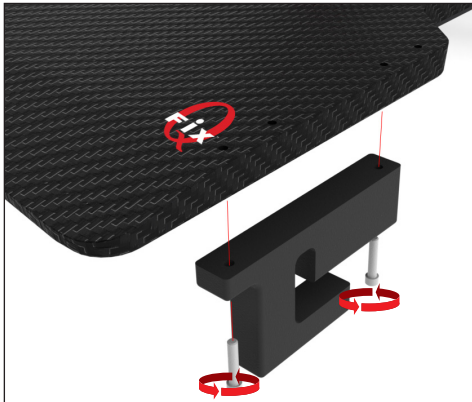

Şekil 33





Şekil 34

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527SKD

SIEMENS KD

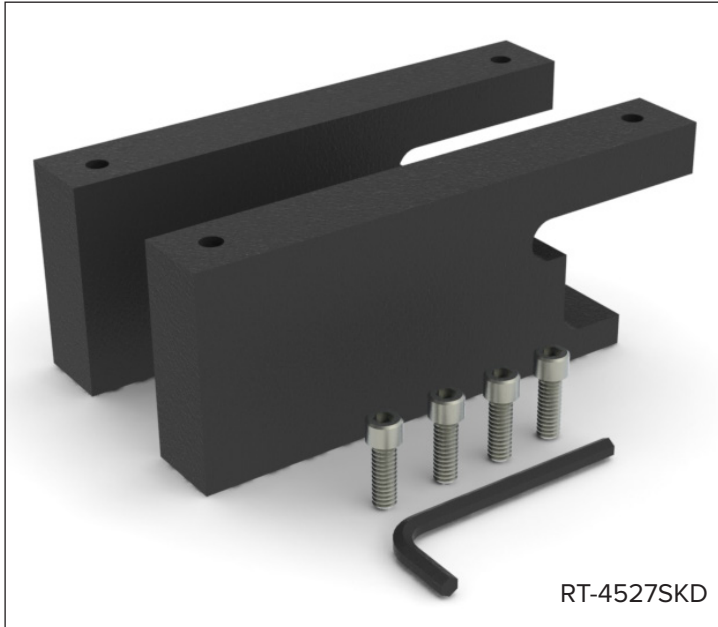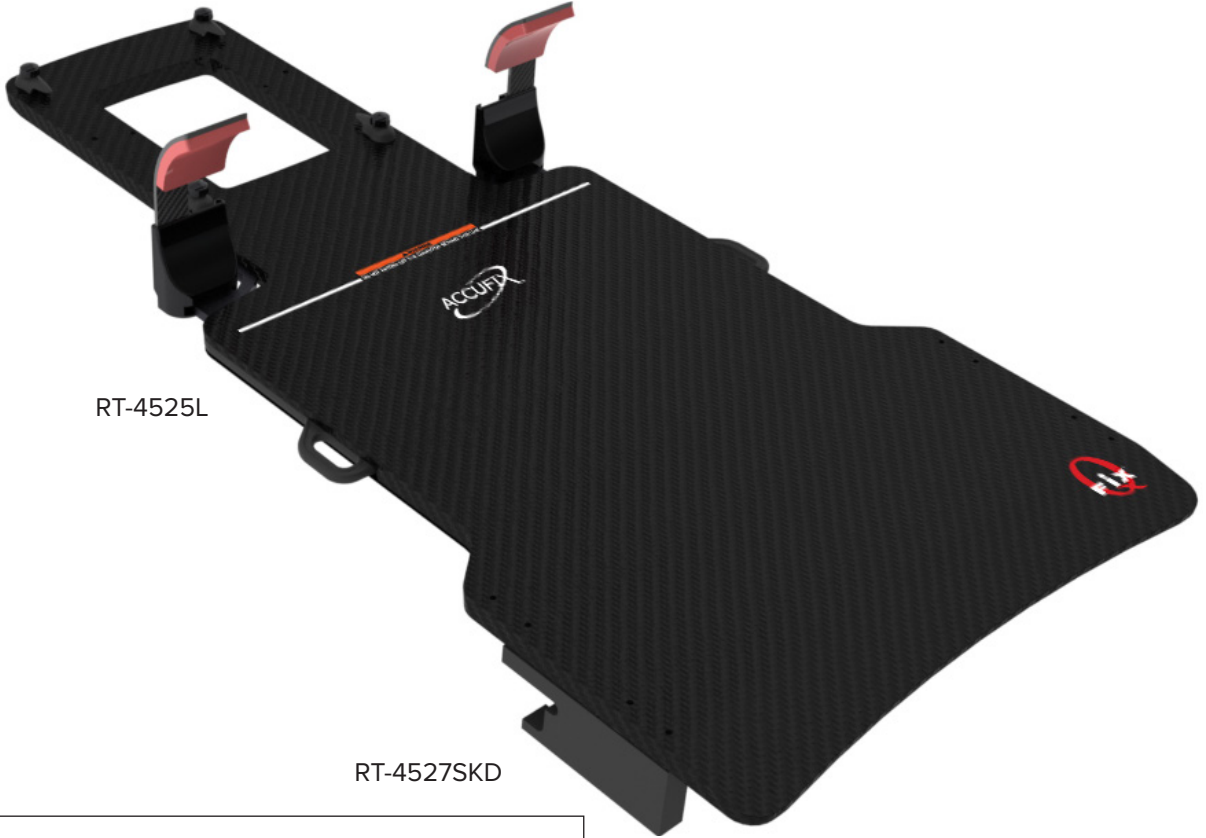

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527SKD


1. Adaptörü aşağıda gösterilen konuma, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe, birlikte verilen Allen Anahtarıyla 2 adet 1/4-20 x 3/4 inç kapaklı vida kullanarak takın (Şekil 35).

! NOT ! Bir sağ ve bir sol adaptör vardır; takıldıktan sonra adaptörün cihazın yan tarafıyla aynı hizada olduğundan emin olun. (Şekil 36)


! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa diskler için mevcut delik setini kullanın.

2. Diğer adaptör için kurulumu tekrarlayın (Şekil 37).

3. Adaptörü aksesuar rayları üzerindeki dayanağa asarak cihazı yatak üstüne takın.

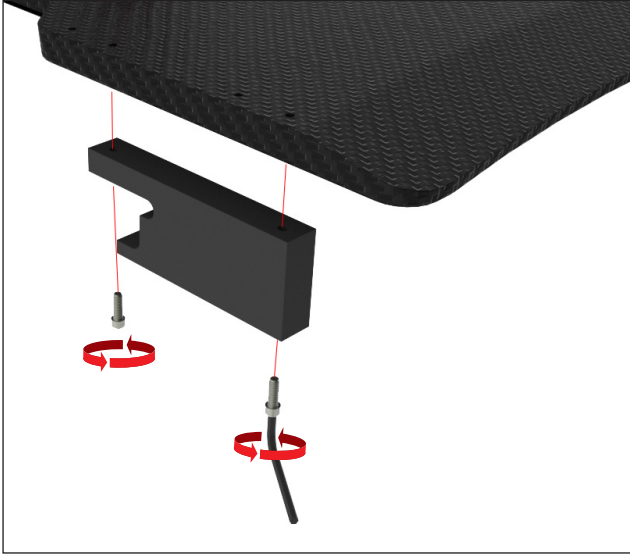

Şekil 35

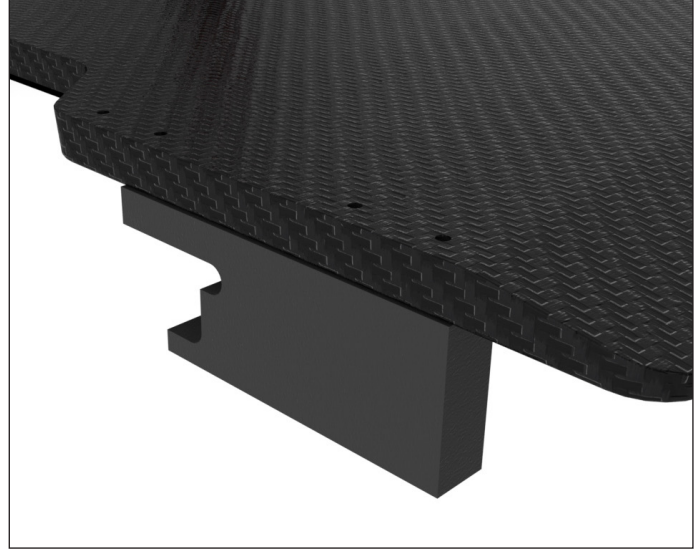

Şekil 36



Şekil 37




Şekil 38

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527ETRJ

VARIAN ETR

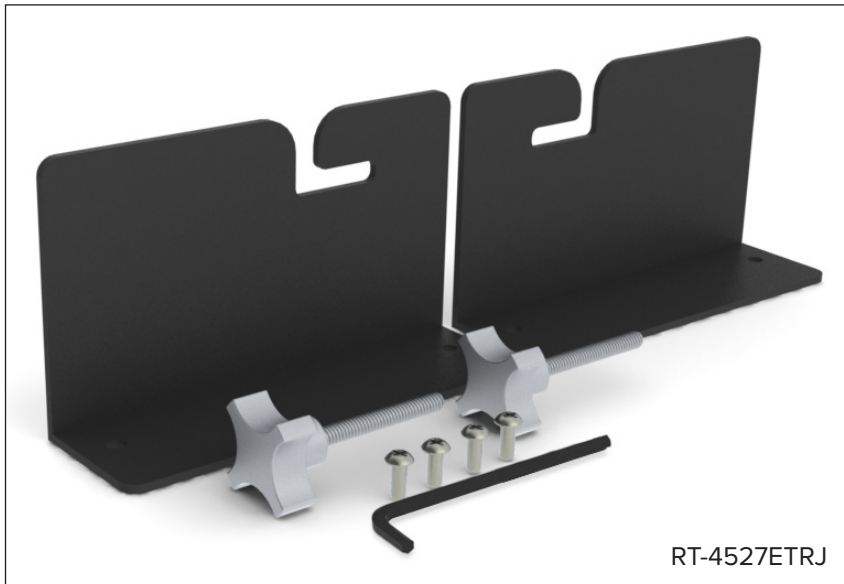

RT-4527ETRJ

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527ETRJ


1. Birlikte verilen Ayan Anahtarını kullanarak ETR yatağının superior ucundan üçüncü Ayan Vidasını sökün. (Şekil 39).
 2. Aynı işlemi yatağın karşı tarafında tekrarlayın.
 3. Ayan vidayı birlikte verilen düğmeyle değiştirin. Bu düğme kalıcı olarak yatağın bir parçası olarak kalmalıdır. Düğmeyi tamamen sıkmayın; yaklaşık 0,5 cm hareket payı bırakın (Şekil 40).
 4. Aynı işlemi yatağın karşı tarafında tekrarlayın.
 5. Adaptörü aşağıda gösterilen konuma, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe, 2 adet ¼-20 x ½ inç vida kullanarak takın (Şekil 41).
- ! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa diskler için mevcut delik setini kullanın.**
6. Diğer adaptör için kurulumu tekrarlayın (Şekil 42).
 7. Adaptörü düğmenin şaftına asarak cihazı yatak üstüne takın. Sabitlemek için düğmeyi sıkın. (Şekil 43)




Şekil 39




Şekil 40

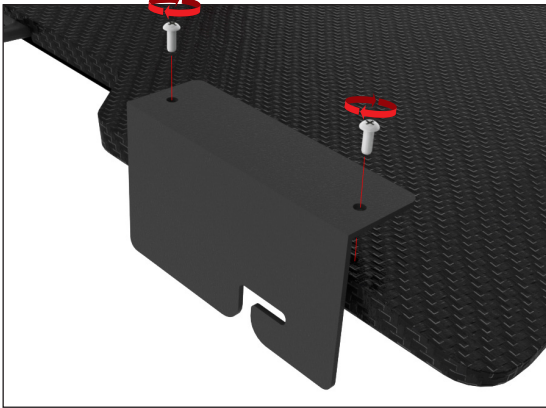

Şekil 41

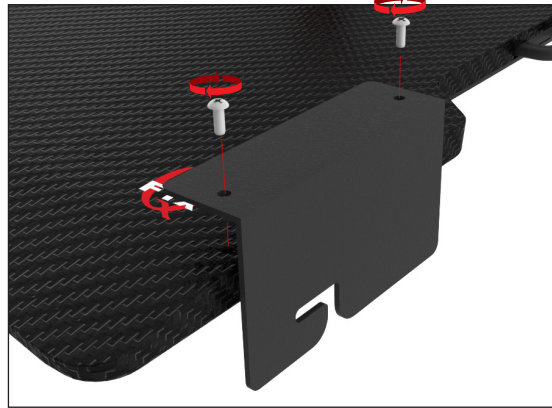

Şekil 42

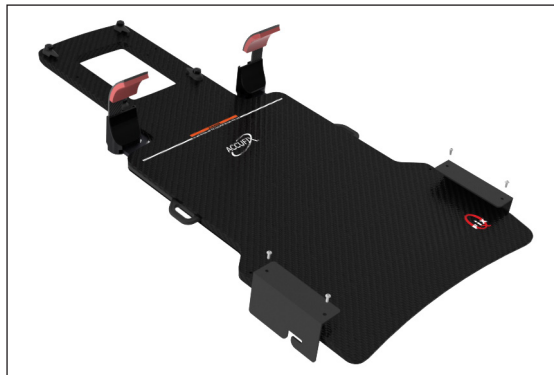


Şekil 43

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527EXA475

NARROW EXACT® STİLİ 500 MM GENİŞLİKTE İNDEKSLENMİŞ BT KAPLAMASI

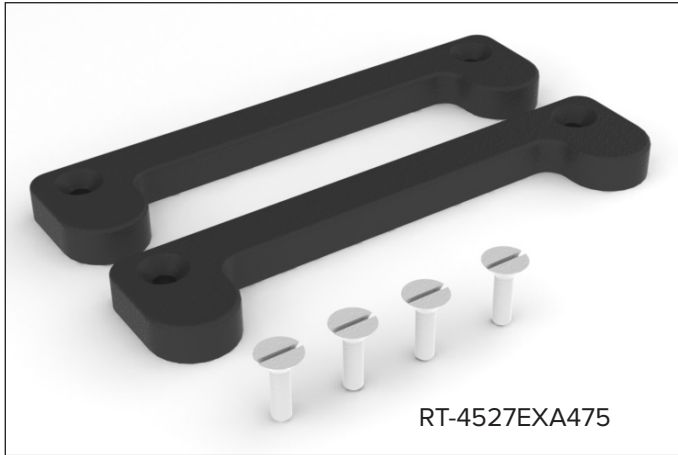

Gerekli Araçlar: Düz Tornavida



BU BT ADAPTÖRÜ KULLANILIRKEN CİHAZ, YATAK ÜSTÜNÜN UCUNDAN DIŞARI SARKMAMALIDIR. YATAK ÜSTÜNÜN UCUNDAN DIŞARI SARKMASI, CİHAZIN YATAK ÜSTÜNDEN DÜŞMESİNE VE HASTANIN YARALANMASINA NEDEN OLABİLİR.

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527EXA475

1. Adaptörü aşağıda gösterilen konuma, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe, 2 adet ¼-20 x ¾ inç vida kullanarak takın (Şekil 44).

! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa diskler için mevcut delik setini kullanın.

2. Diğer adaptör için kurulumu tekrarlayın (Şekil 45).

3. Adaptörleri indeksleme çentikleriyle hizalayarak cihazı yatak üst kısmına monte edin. Cihaz sabitlenene kadar üzerine bastırın.

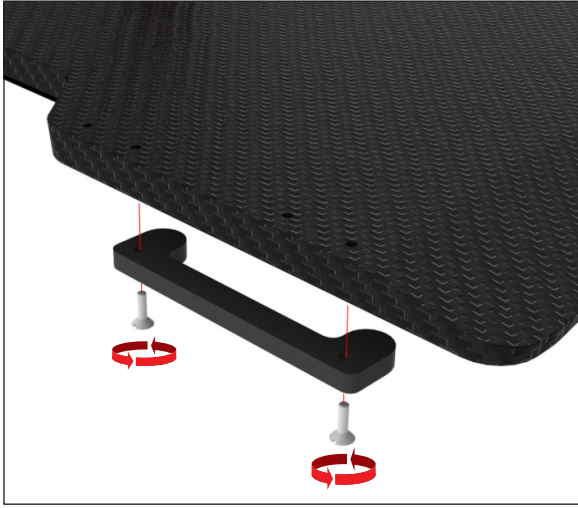

Şekil 44



Şekil 45




Şekil 46

ADAPTÖR KURULUMU

RT-4527PETCT

PHILIPS GEMİNI™ VE GE DISCOVERY™ LS 480 MM GENİŞLİKTE PET/
BT KAPLAMASI

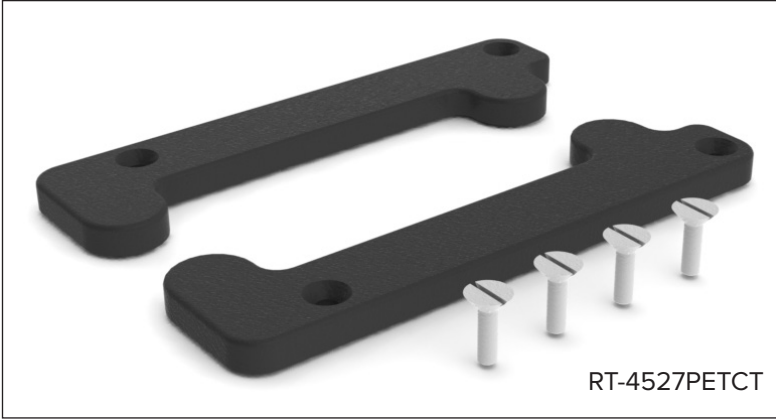

Gerekli Araçlar: Düz Tornavida



BU BT ADAPTÖRÜ KULLANILIRKEN CİHAZ, YATAK ÜSTÜNÜN UCUNDAN DIŞARI SARKMAMALIDIR. YATAK ÜSTÜNÜN UCUNDAN DIŞARI SARKMASI, CİHAZIN YATAK ÜSTÜNDEN DÜŞMESİNE VE HASTANIN YARALANMASINA NEDEN OLABİLİR.

ADAPTÖR KURULUMU


RT-4527PETCT

1. Adaptörü aşağıda gösterilen konuma, 140 mm (5,5 inç) aralıklı iki deliğe, 2 adet ¼-20 x ¾ inç vida kullanarak takın (Şekil 47).

! NOT ! Hangi deliklerin kullanıldığı önemli değildir ancak bir Hand Grip Array takılıysa diskler için mevcut delik setini kullanın.

2. Diğer adaptör için kurulumu tekrarlayın (Şekil 48).

3. Adaptörleri indeksleme çentikleriyle hizalayarak cihazı yatak üst kısmına monte edin. Cihaz sabitlenene kadar üzerine bastırın.

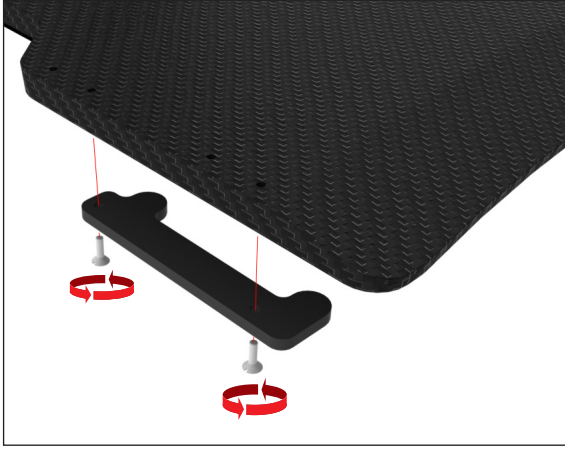

Şekil 47



Şekil 48



Şekil 49

ŞİMİN TAKILMASI

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (Şekil 50)

1. Adaptörü Hand Grip Array kısmına sabitleyen 2 vidayı sökün.
2. Vida deliklerini şimdiki deliklerle hizalayarak adaptör ve Hand Grip Array arasına şimi yerleştirin.
3. İki vidayı yerine oturana kadar geri takın.
4. Kurulum talimatlarıyla devam edin.

RT-4527LMI3 (Şekil 51)

1. Adaptörü Hand Grip Array kısmına sabitleyen 2 vidayı sökün.
2. Vida deliklerini şimdiki deliklerle hizalayarak adaptör ve Hand Grip Array arasına şimi yerleştirin.
3. İki vidayı yerine oturana kadar geri takın.
4. Kurulum talimatlarıyla devam edin.



Şekil 50



Şekil 51



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com