
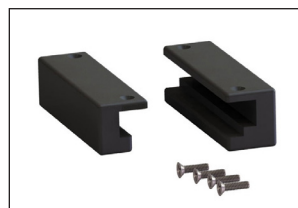
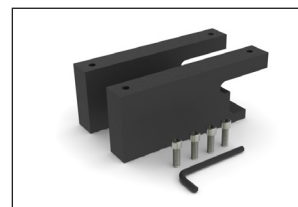
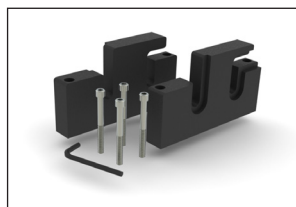
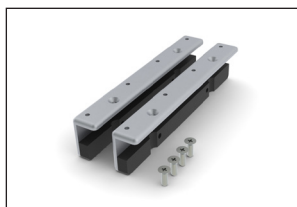
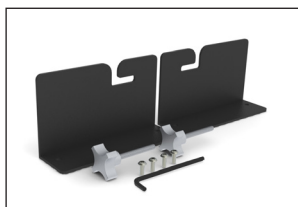
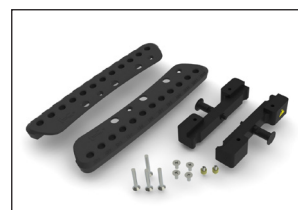
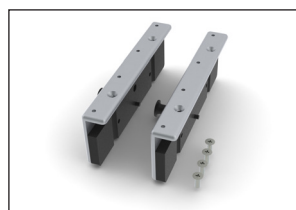
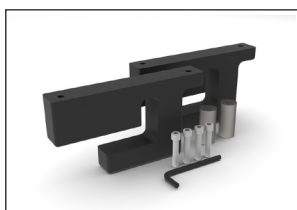


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ nối chia độ

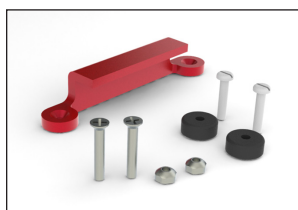

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, Quantum, AccuFix, Cantilever Board, CURVE, BoS, Encompass và Hand Grip Array là các nhãn hiệu của Qfix.

Exact® và ETR® là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Varian Medical Systems.

Medical Intelligence I-Beam là nhãn hiệu và Precise® là nhãn hiệu đã đăng ký của Elekta AB.

ZXT và TXT là nhãn hiệu của Siemens AG.

Med-Tec Prodigy và IPPS là nhãn hiệu của Civco Medical Solutions.

Gemini là nhãn hiệu của Philips Medical Systems.

Discovery là nhãn hiệu của GE Medical.

THẬN TRỌNG CHUNG

LỜI CẢNH BÁO

Tham khảo CQmedical.com để biết danh sách các biểu tượng và định nghĩa của các biểu tượng.

! CẢNH BÁO ! KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬA ĐỔI THIẾT BỊ NÀY. NẾU BẤT KỲ BỘ PHẬN NÀO CỦA THIẾT BỊ NÀY CHỊU TẢI QUÁ NẶNG, BỊ HƯ HỎNG HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐÚNG CÁCH, HÃY NGỪNG SỬ DỤNG NGAY VÀ LIÊN HỆ CQ MEDICAL THEO SỐ +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 HOẶC SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

Các bộ nối được thiết kế để hoạt động với Portrait™, AccuFix™ Cantilever Board™, Tấm CURVE™, và Khung đầu BoS™.

CẢNH BÁO SỬ DỤNG CHUNG

KHÔNG được đặt thiết bị chìa ra ngoài đầu mặt giường khi sử dụng các thanh nối CT sau:


- RT-4527LTOMO (trang 7)
- RT-4529M (trang 20)
- RT-4527MTPCT (trang 22)
- RT-4527EXA475 (trang 34)
- RT-4527PETCT (trang 36)

Chìa ra ngoài đầu mặt giường có thể khiến thiết bị rơi khỏi mặt giường, làm bệnh nhân bị thương.

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527LMI3

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ VÀ BỘ NỐI XẠ TRỊ CẮT LỚP

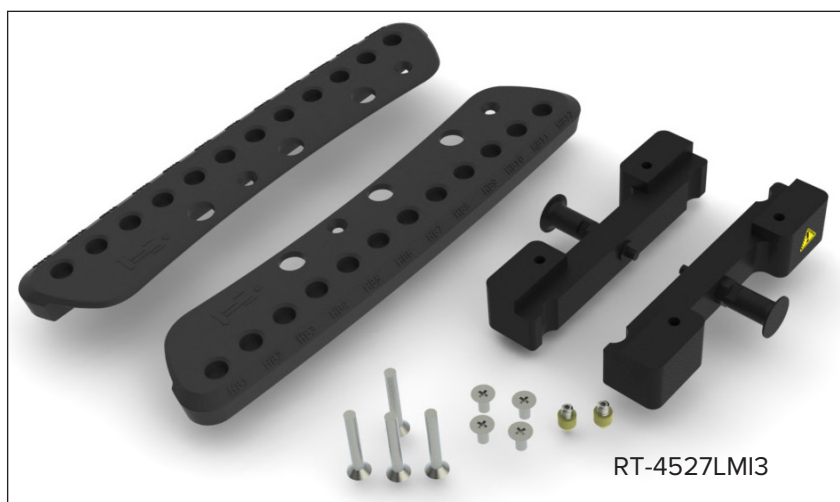

Công cụ cần thiết: Tua vít đầu Phillips



! CẢNH BÁO ! THẬN TRỌNG VÌ CÓ THỂ CÓ ĐIỂM KẸP TAY GIỮA BỘ NỐI THIẾT BỊ VÀ MẶT GIƯỜNG KHI ẤN TỪ PHÍA TRÊN ĐƯỜNG CẢNH BÁO.

4

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – 2002950_IFU, Indexing Adapters_VI

CQ Medical | +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 | www.CQmedical.com

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527LMI3


! LƯU Ý ! Nếu lắp đặt vào thiết bị dày 28 mm, chẳng hạn như Encompass™, hãy tham khảo trang 38 để biết cách lắp đặt miếng chêm trước khi tiếp tục thiết lập.

1. Lắp bộ nối vào từng Tấm tay nắm bằng 2 vít 1/4-20 x 1 1/2" (mỗi bộ nối) (Hình 1).
2. Lắp đặt bộ nối định vị hình nón màu vàng trực tiếp vào đáy thiết bị (Lắp một bộ vào mỗi bên). (Hình 2 và 2a)
3. Lắp các Tấm tay nắm vào thiết bị, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít 1/4-20 x 1/2" (mỗi tấm). (Hình 3)


! LƯU Ý ! Có thể có điểm kẹp tay giữa bộ nối thiết bị và mặt giường khi ấn từ phía trên đường cảnh báo.

! LƯU Ý ! Để biết thêm thông tin về cách lắp đặt các Tấm tay nắm, hãy tham khảo Hướng dẫn sản phẩm và Hướng dẫn sử dụng của Tấm tay nắm.


4. Đặt vị trí thiết bị lên mặt giường bằng cách căn chỉnh hình nón màu vàng với các lỗ chia độ trên bề mặt trên của mặt giường. Vặn và kéo chốt đẩy để gắn/nhả thiết bị trên mặt giường.

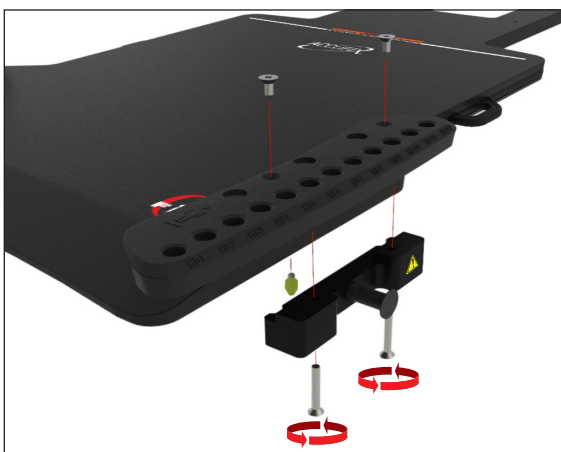


Hình 1

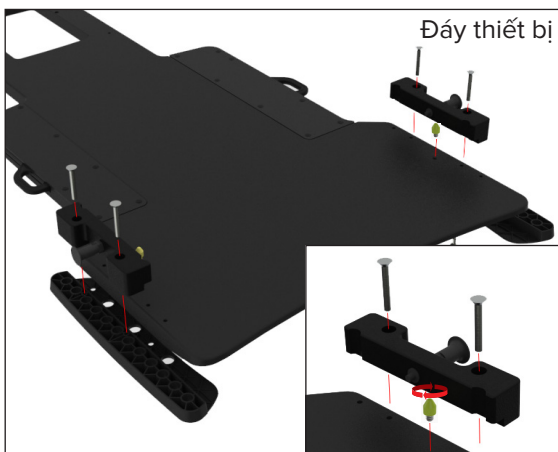

Hình 2

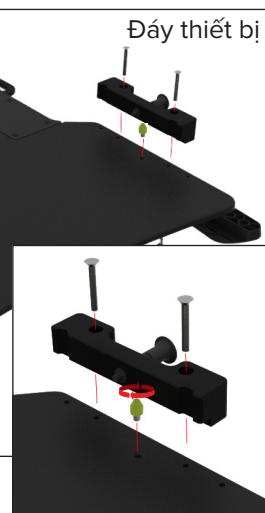

Hình 2a

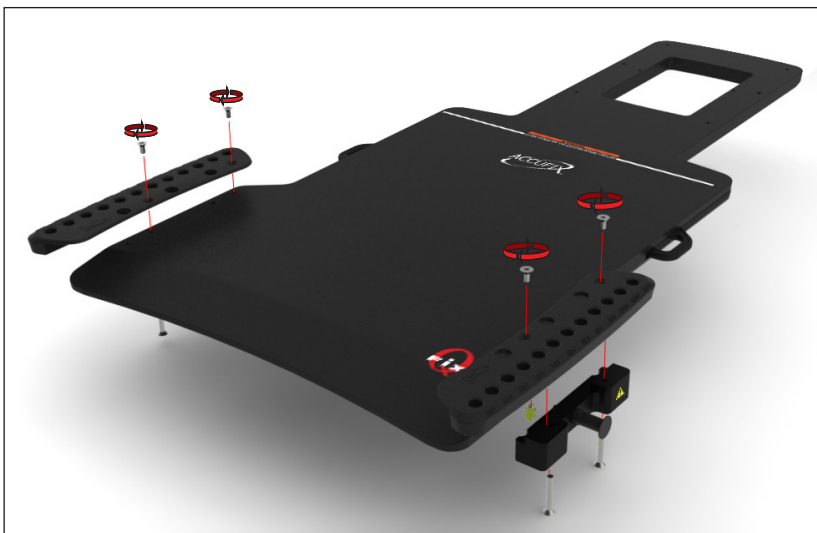

Hình 3

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527LTOMO



! CẢNH BÁO ! KHÔNG ĐẶT THIẾT BỊ CHÌA RA NGOÀI ĐẦU MẶT GIƯỜNG KHI SỬ DỤNG BỘ NỐI NÀY; LÀM NHƯ VẬY CÓ THỂ KHIẾN THIẾT BỊ RƠI KHỎI MẶT GIƯỜNG, GÂY THƯƠNG TÍCH CHO BỆNH NHÂN.

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527LTOMO

1. Lắp đặt bộ nối định vị hình nón màu vàng trực tiếp vào đáy thiết bị (Lắp một bộ vào mỗi bên) (Hình 4 và 5).
2. Đặt vị trí thiết bị lên mặt giường bằng cách căn chỉnh hình nón màu vàng với các lỗ chia độ trên bề mặt trên của mặt giường.



Hình 4




Hình 5

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527MI

ELEKTA / MEDICAL INTELLIGENCE I-BEAM™ VÀ BỘ NỐI XẠ TRỊ CẮT LỚP

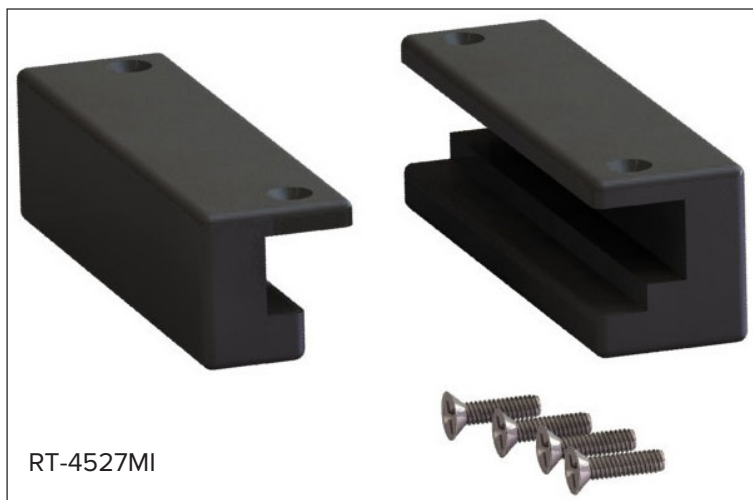

Công cụ cần thiết: Tua vít đầu Phillips

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527MI


1. Lắp một trong hai bộ nối vào một bên của thiết bị ở vị trí được minh họa bên dưới, sử dụng 2 vít 1/4-20 x 1/2" (mỗi bên). (Hình 6)

! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho bộ nối.


2. Lắp lại việc lắp đặt cho bộ nối bên đối diện (Hình 7).

3. Đặt thanh định vị 2 chốt ở vị trí mong muốn (sau khi gắn, chốt thanh định vị sẽ thẳng hàng với các lỗ ở đáy thiết bị) (Hình 6, 7 và 8).

4. Lắp đặt thiết bị lên mặt giường bằng cách móc bộ nối lớn hơn trong hai bộ nối lên mặt giường trước, sau đó là bộ nối nhỏ hơn và định vị thiết bị bằng thanh định vị 2 chốt.

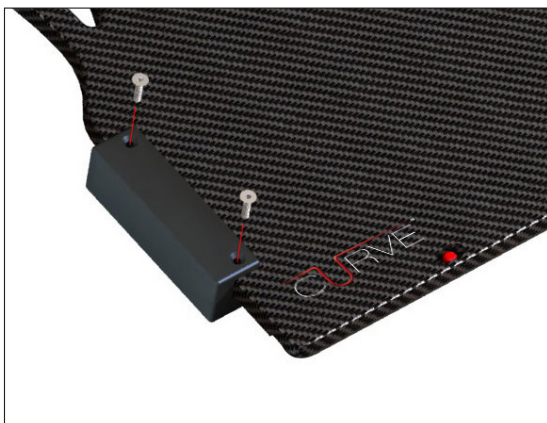

Hình 6

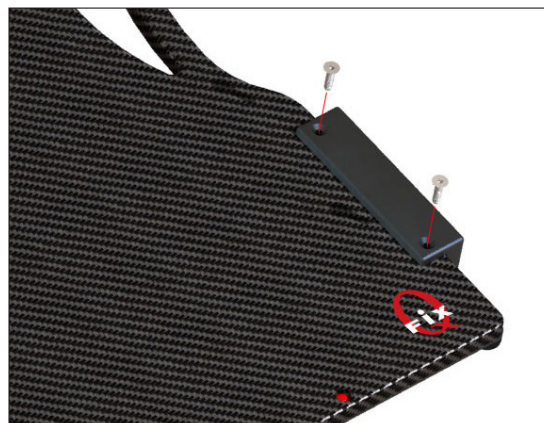


Hình 7



Hình 8

THIẾT LẬP BỘ NỐI RT-4527EXAG

BỘ NỐI VARIAN EXACT®

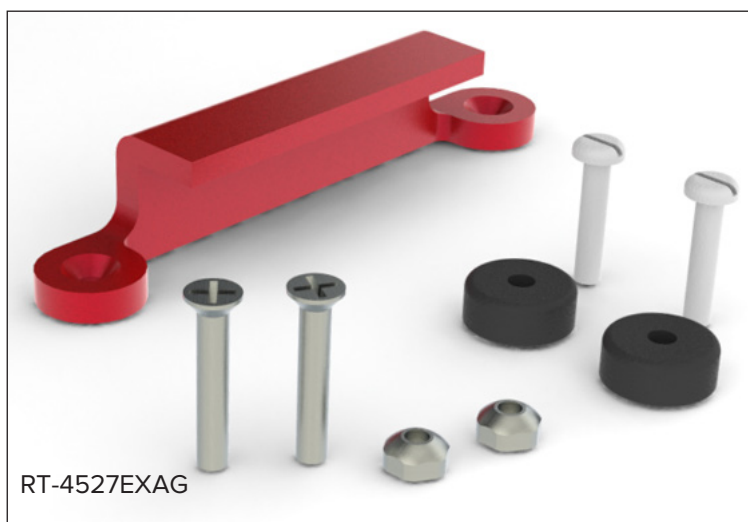

Công cụ cần thiết: Tua vít Philips và đầu bẹt

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527EXAG

1. Lắp bộ nối màu đỏ vào thiết bị, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít 1/4-20 x 1 3/8". Sau đó gắn 2 đai ốc an toàn 1/4-20 vào các vít từ mặt trên của thiết bị (Hình 9).


! LƯU Ý ! Có thể lắp bộ nối ở bên phải hoặc bên trái của thiết bị. Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho bộ nối.

2. Lắp 2 Đĩa định vị ở phía đối diện của bộ nối định vị, vào các lỗ tương ứng, sử dụng vít 1/4-20 x 1 1/4" (1 cho mỗi đĩa) (Hình 10).

3. Lắp thiết bị lên mặt giường bằng cách móc bộ nối màu đỏ vào một bên, sau đó ấn bên có đĩa định vị xuống vào các rãnh chia độ cho đến khi nó được cố định.



Hình 9

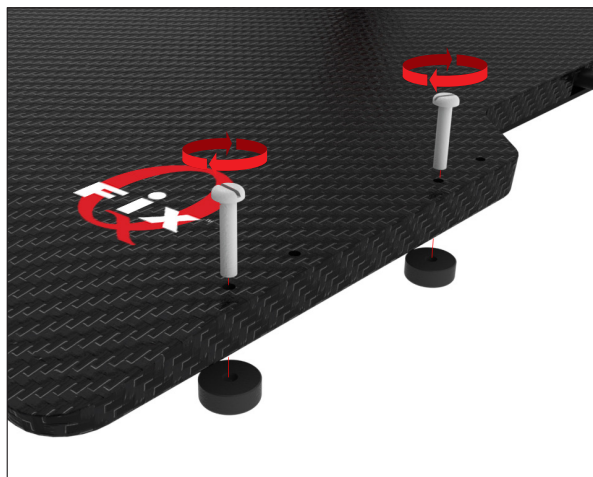

Hình 10



Hình 11

THIẾT LẬP BỘ NỐI RT-4527QFIX

BỘ NỐI QFIX™ KVUE™ VÀ QUANTUM™



Công cụ cần thiết: Tua vít Philips và đầu bẹt

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527QFIX

1. Lắp bộ nối vào thiết bị, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít 1/4-20 x 3/4". Đảm bảo rằng bộ phận của bộ nối có phần nhô ra hướng vào trong, để nó có thể khóa vào viền của thiết bị Qfix (Hình 12).


! LƯU Ý ! Có thể lắp bộ nối ở bên phải hoặc bên trái của thiết bị. Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho bộ nối.

2. Lắp 2 đĩa định vị ở phía đối diện của bộ nối định vị, vào các lỗ tương ứng, sử dụng vít 1/4-20 x 1 1/4" (1 cho mỗi đĩa) (Hình 13).

3. Lắp thiết bị lên mặt giường bằng cách móc bộ nối vào một bên của mặt giường, sau đó ấn bên có đĩa định vị xuống vào các rãnh chia độ cho đến khi cố định.



Hình 12

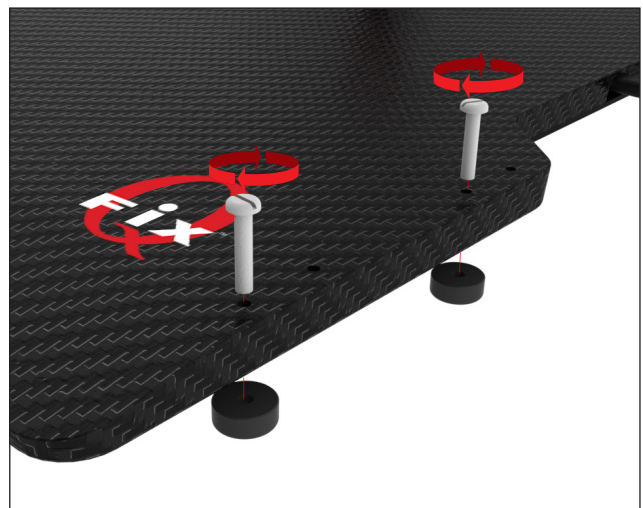

Hình 13




Hình 14

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527ELK

ELEKTA PRECISE®

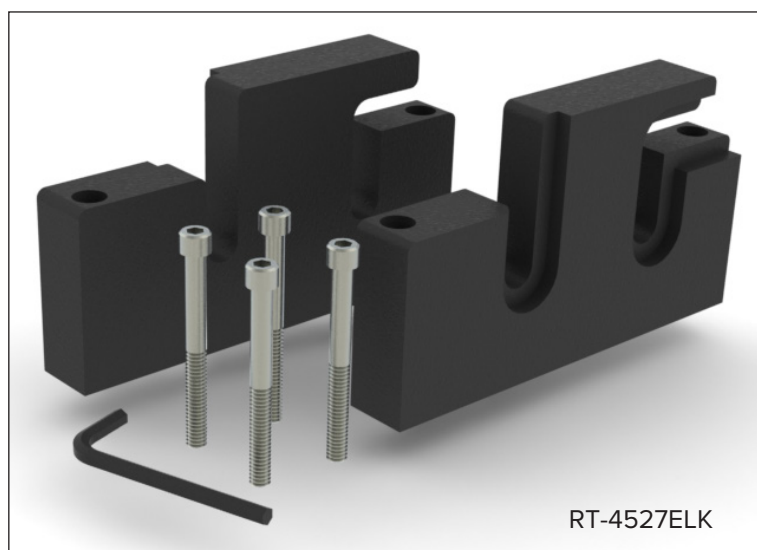

THIẾT LẬP BỘ NỐI


RT-4527ELK

1. Lắp bộ nối sao cho bề mặt nhẵn nằm ở bên ngoài thiết bị và bộ nối ở vị trí được minh họa bên dưới, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít có nắp 1/4-20 x 2 1/2" với Chìa vặn Allen đi kèm (Hình 14).


! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho bộ nối.

2. Lắp lại việc lắp đặt cho bộ nối đối diện, giữ mặt nhẵn của bộ nối hướng ra ngoài (Hình 15).

3. Lắp thiết bị lên mặt giường bằng cách móc bộ nối vào chân đỡ trên thanh phụ kiện.

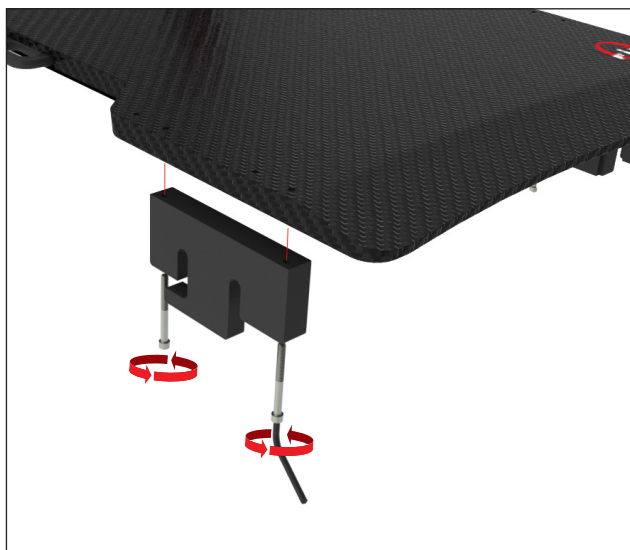

Hình 15

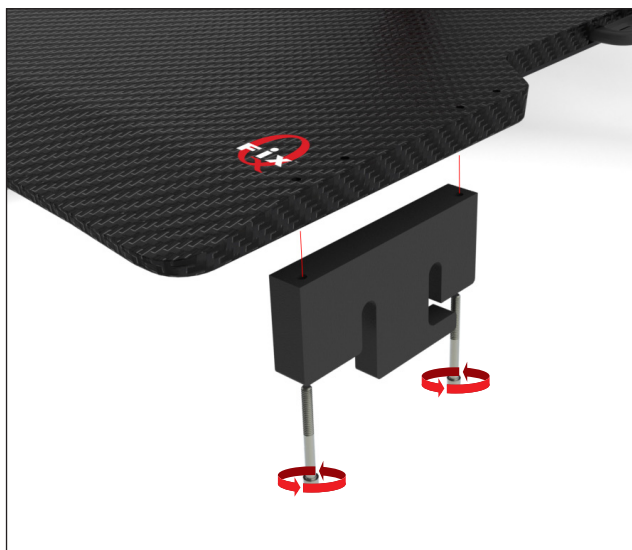

Hình 16



Hình 17

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4529M

VARIAN EXACT® TƯƠNG THÍCH CT



RT-4525L

RT-4529M



RT-4529M

Công cụ cần thiết: Tua vít đầu bẹt



KHÔNG ĐỂ THIẾT BỊ CHÌA RA NGOÀI ĐẦU MẶT GIƯỜNG KHI SỬ DỤNG BỘ NỐI CT NÀY. CHÌA RA NGOÀI ĐẦU MẶT GIƯỜNG CÓ THỂ KHIẾN THIẾT BỊ RƠI KHỎI MẶT GIƯỜNG, LÀM BỆNH NHÂN BỊ THƯƠNG.

THIẾT LẬP BỘ NỐI


RT-4529M

1. Lắp 2 đĩa định vị vào hai bên của thiết bị, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng vít 1/4-20 x 1 1/4" (1 cho mỗi đĩa) (Hình 17).


! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho đĩa.

2. Lắp 2 đĩa định vị còn lại ở phía đối diện giống như với hai đĩa đầu tiên, vào các lỗ tương ứng, sử dụng vít 1/4-20 x 1 1/4" (1 cho mỗi đĩa) (Hình 18).

3. Lắp đặt thiết bị lên mặt giường bằng cách căn chỉnh đĩa định vị với các rãnh chia độ. Ấn thiết bị xuống cho đến khi thiết bị chắc chắn.

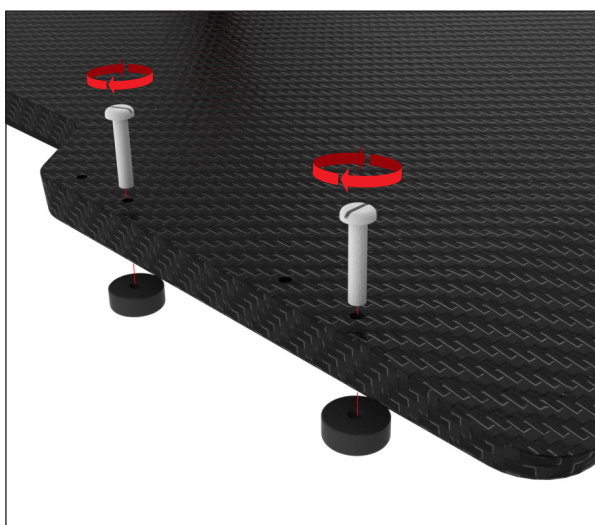

Hình 18

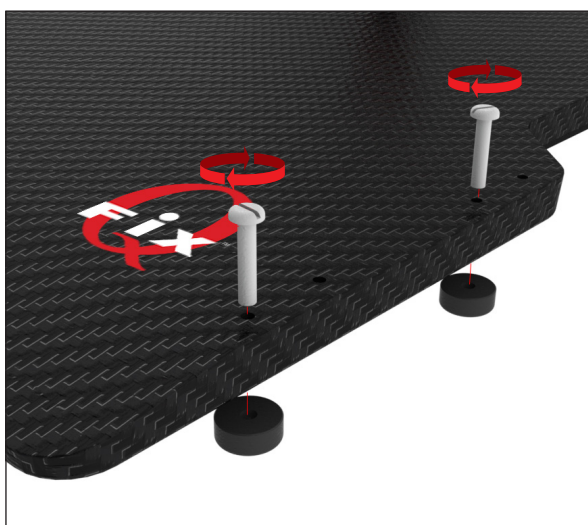


Hình 19



Hình 20

THIẾT LẬP BỘ NỐI RT-4527MTPCT

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™ CT

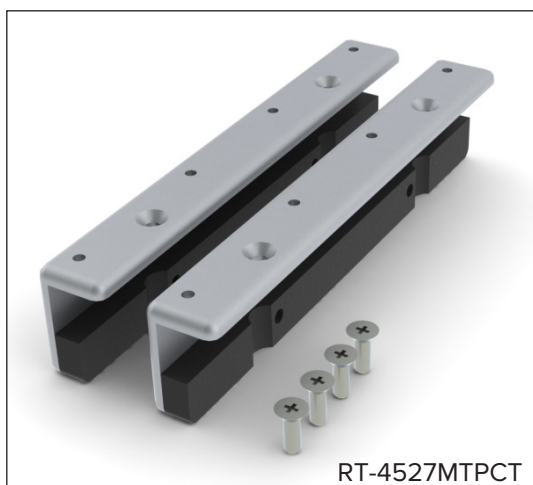

Công cụ cần thiết: Tua vít đầu Philips



KHÔNG ĐỂ THIẾT BỊ CHÌA RA NGOÀI ĐẦU MẶT GIƯỜNG KHI SỬ DỤNG BỘ NỐI CT NÀY. CHÌA RA NGOÀI ĐẦU MẶT GIƯỜNG CÓ THỂ KHIẾN THIẾT BỊ RƠI KHỎI MẶT GIƯỜNG, LÀM BỆNH NHÂN BỊ THƯƠNG.


THIẾT LẬP BỘ NỐI RT-4527MTPCT

1. Lắp bộ nối vào vị trí được minh họa bên dưới, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít 1/4-20 x 3/4" (Hình 20 và 21).


! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho bộ nối.

2. Lắp lại việc lắp đặt cho bộ nối đối diện, giữ mặt nhẵn của bộ nối hướng ra ngoài.

3. Lắp đặt thiết bị bằng cách căn chỉnh bộ nối với vạch chia độ dọc theo cạnh của mặt giường. Ấn thiết bị xuống cho đến khi thiết bị chắc chắn.

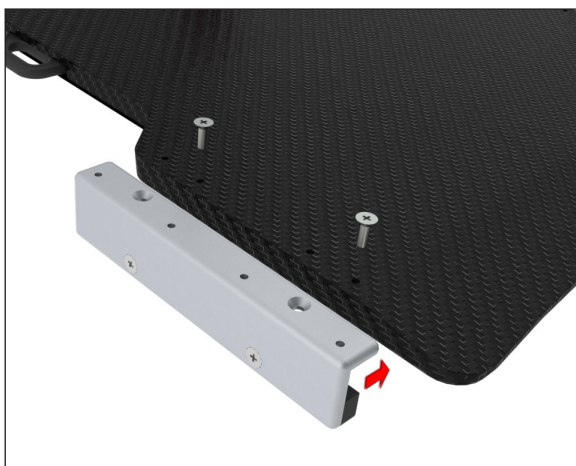

Hình 21

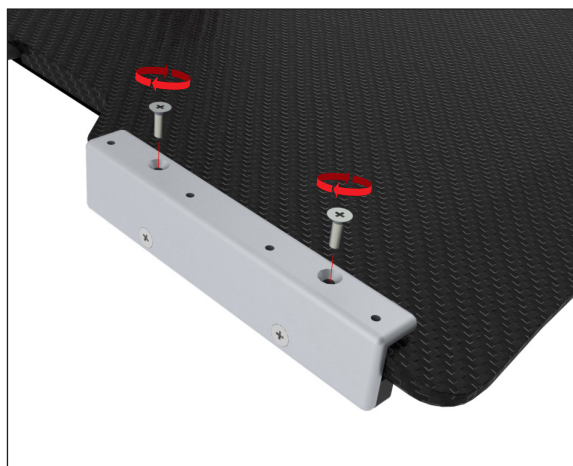

Hình 22




Hình 23

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527MTP

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

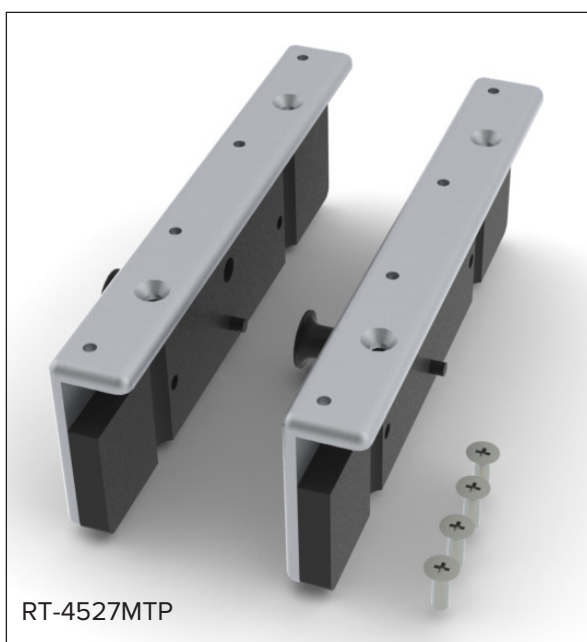

Công cụ cần thiết: Tua vít đầu Philips

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527MTP

1. Lắp bộ nối vào vị trí được minh họa bên dưới, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít 1/4-20 x 3/4" (Hình 24 và 25).

! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho bộ nối.

2. Lắp lại việc lắp đặt cho bộ nối bên đối diện.

3. Lắp đặt thiết bị bằng cách căn chỉnh bộ nối với vạch chia độ dọc theo cạnh của mặt giường. Vặn và kéo chốt đẩy để gắn/nhả thiết bị trên mặt giường.



Hình 24



Hình 25




Hình 26

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527IPS

SIEMENS/MED-TEC PRODIGY™

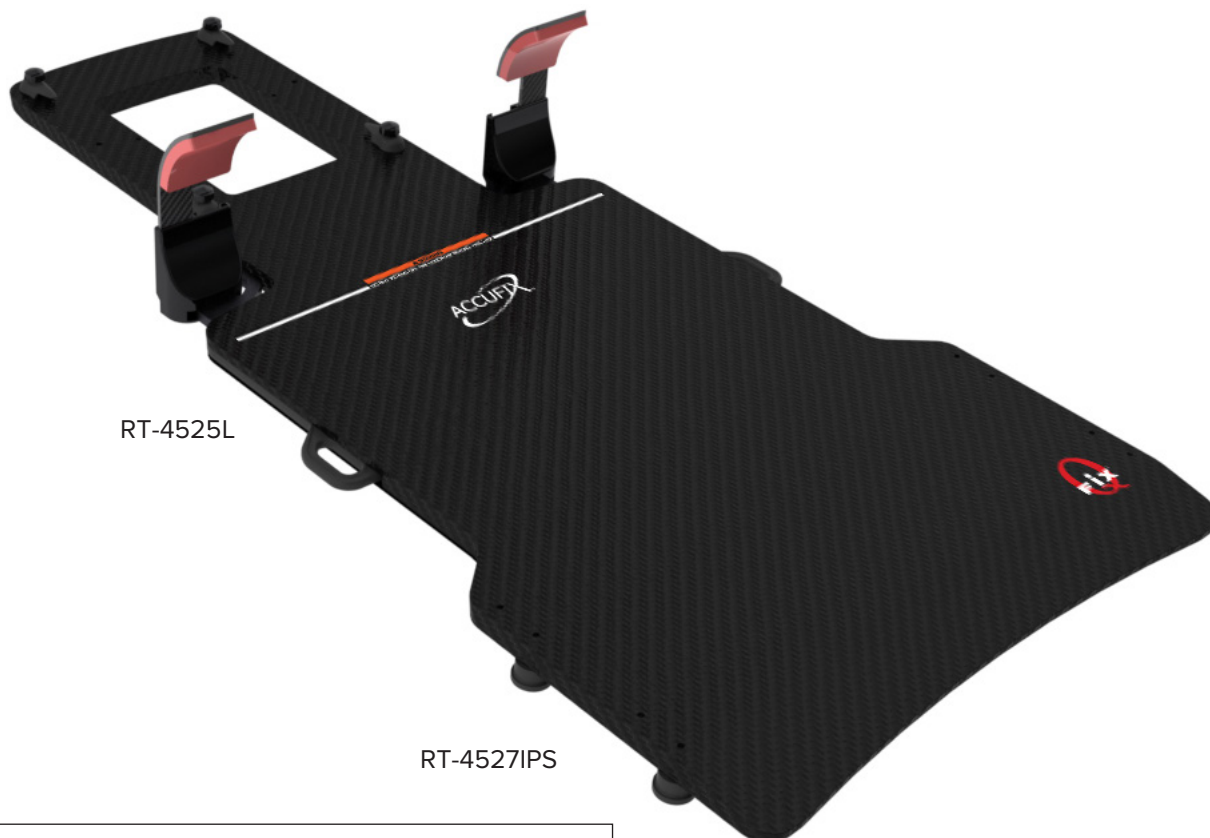

THIẾT LẬP BỘ NỐI


RT-4527IPS

1. Lắp 2 đĩa định vị (có viền) vào hai bên của thiết bị, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng vít 1/4- 20 x 1 1/4" (1 cho mỗi đĩa) (Hình 27).


! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho đĩa.

2. Lắp 2 đĩa định vị còn lại (không có viền) ở phía đối diện giống như với hai đĩa đầu tiên, vào các lỗ tương ứng, sử dụng vít 1/4-20 x 1 1/4" (1 cho mỗi đĩa) (Hình 28).

3. Lắp đặt thiết bị lên mặt giường bằng cách căn chỉnh đĩa với các rãnh chia độ, sau đó móc các đĩa có viền lên mặt giường trước. Ấn bên kia xuống cho đến khi thiết bị chắc chắn.

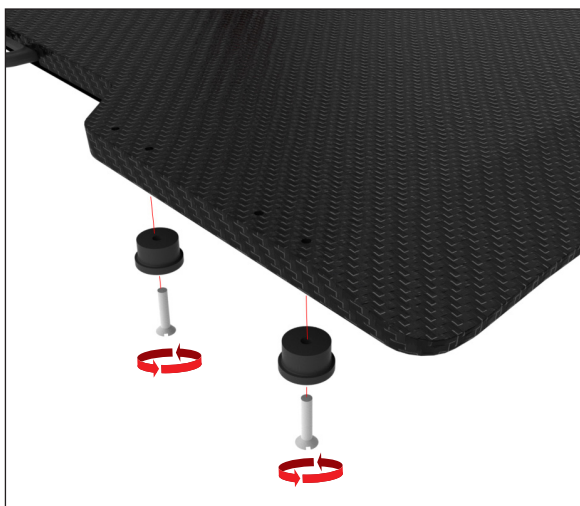

Hình 27

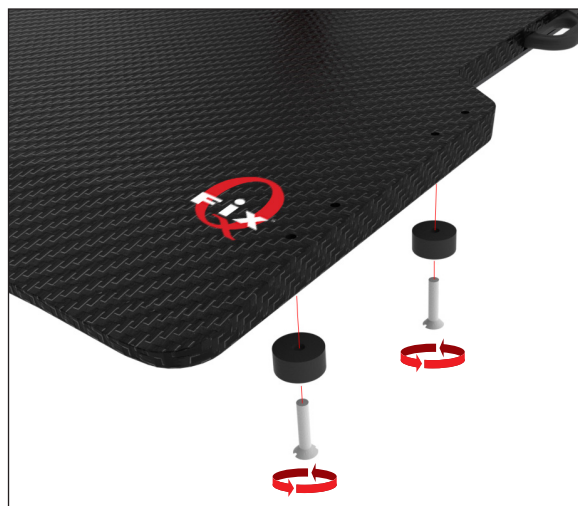

Hình 28




Hình 29

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527ZXT

SIEMENS ZXT

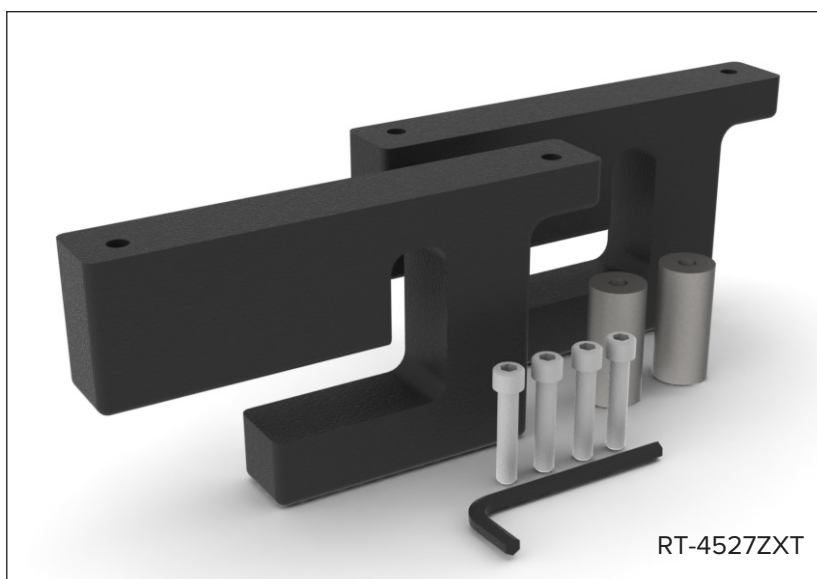

THIẾT LẬP BỘ NỐI


RT-4527ZXT

1. Thay thế chân đỡ vuông trên Giường ZXT bằng chân đỡ tròn kèm theo. (Hình 30)
2. Lắp bộ nối vào vị trí được minh họa bên dưới, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít có nắp, 1/4-20 x 1 1/4" với Chìa vặn Allen đi kèm (Hình 31).

! LƯU Ý ! Có một bộ nối bên phải và bên trái; hãy đảm bảo rằng sau khi lắp đặt, bộ nối sẽ ngang hàng với cạnh của thiết bị. (Hình 32).

! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho đĩa.


3. Lắp lại việc lắp đặt cho bộ nối bên đối diện (Hình 33).
4. Lắp thiết bị lên mặt giường bằng cách móc bộ nối vào chân đỡ trên thanh phụ kiện (Hình 34).

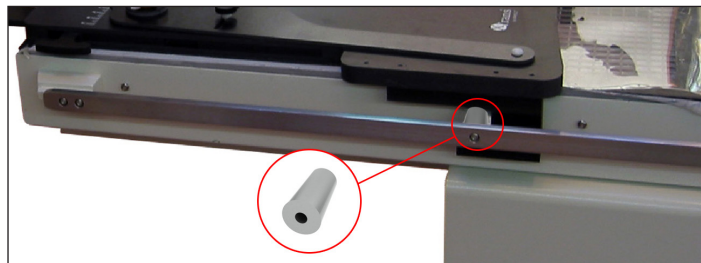


Hình 30



Hình 31

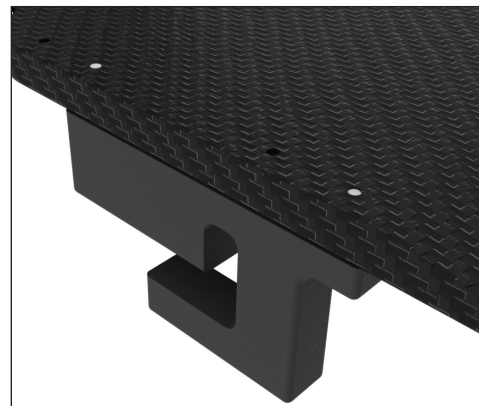

Hình 32

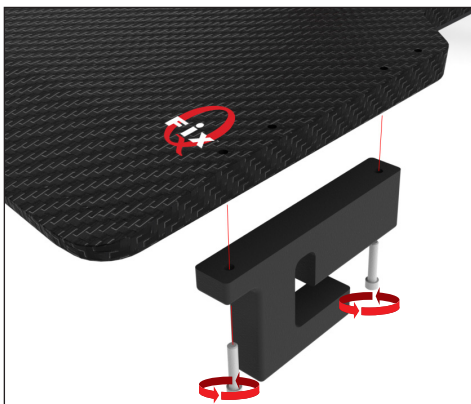

Hình 33





Hình 34

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527SKD

SIEMENS KD

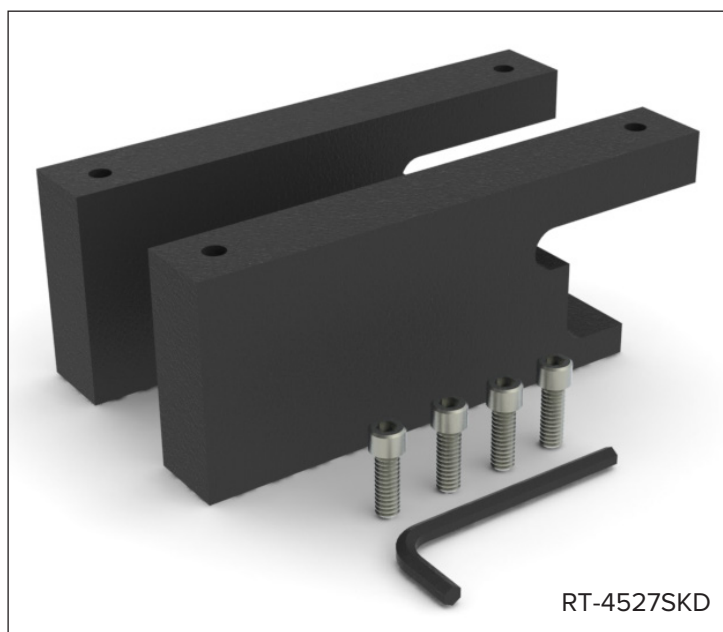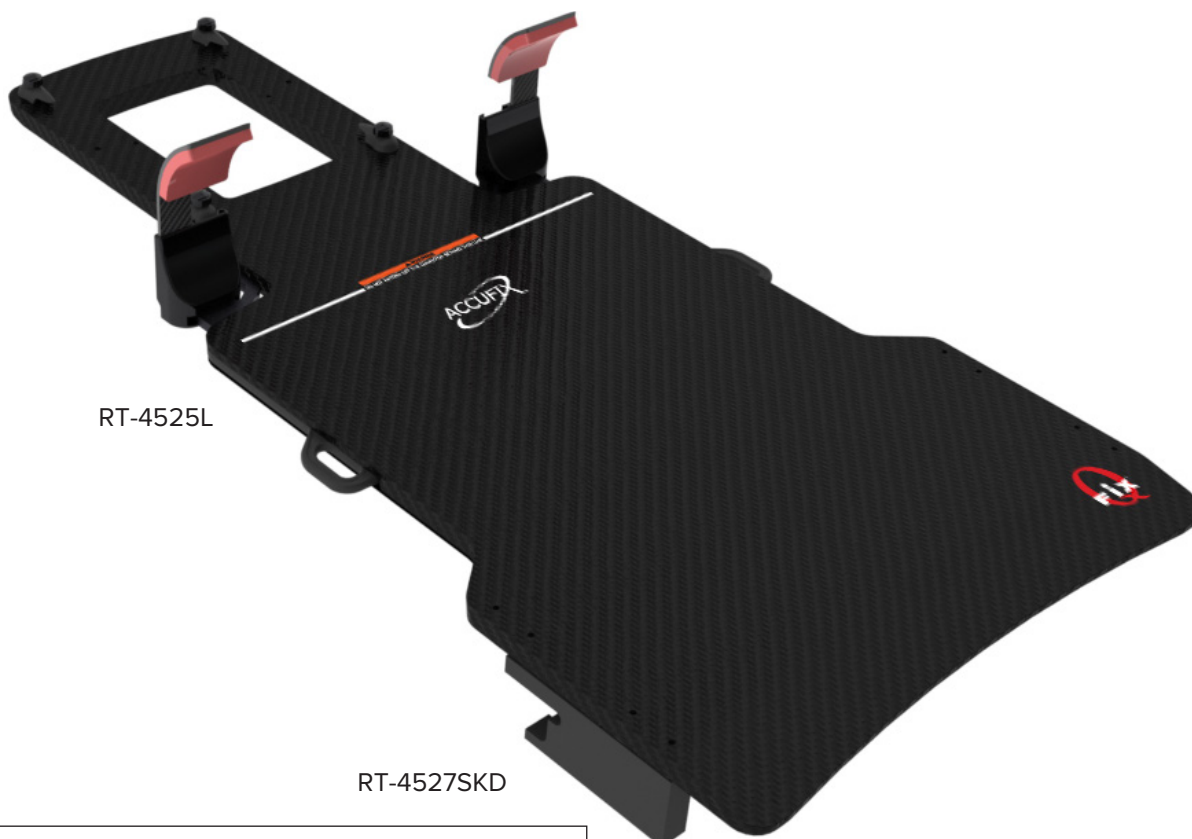

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527SKD


1. Lắp bộ nối vào vị trí được minh họa bên dưới, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít có nắp, 1/4-20 x 3/4" với Chìa vặn Allen đi kèm (Hình 35).

! LƯU Ý ! Có một bộ nối bên phải và bên trái; hãy đảm bảo rằng sau khi lắp đặt, bộ nối sẽ ngang hàng với cạnh của thiết bị. (Hình 36)


! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho đĩa.

2. Lắp lại việc lắp đặt cho bộ nối bên đối diện (Hình 37).

3. Lắp thiết bị lên mặt giường bằng cách móc bộ nối vào chân đỡ trên thanh phụ kiện.

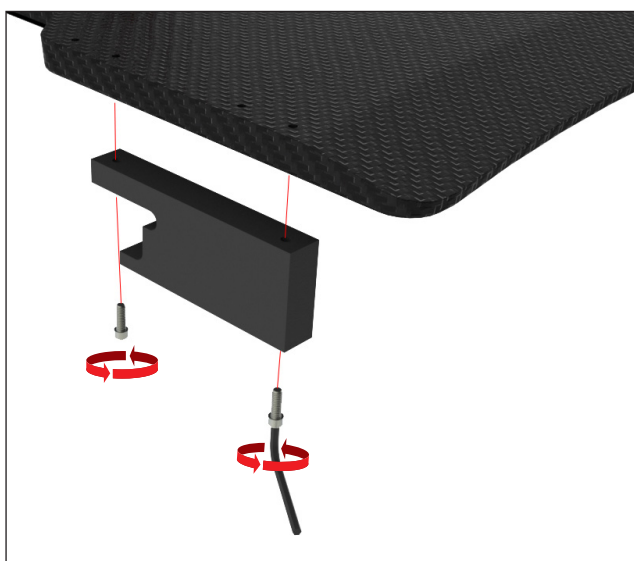

Hình 35

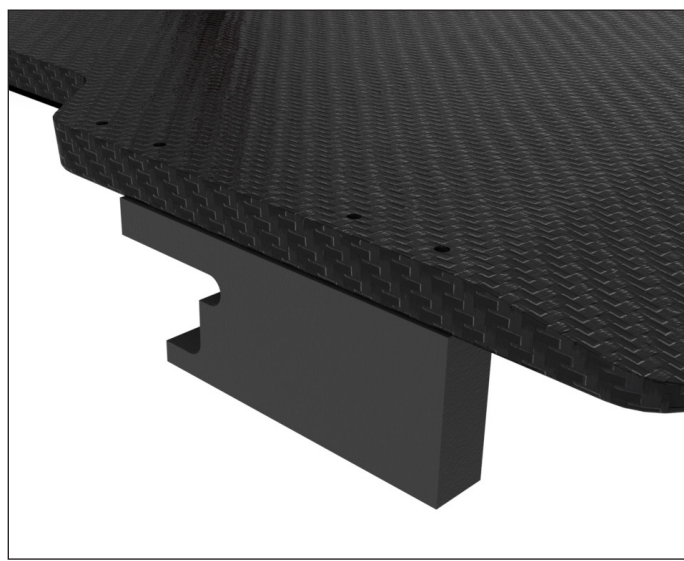

Hình 36



Hình 37



Hình 38

THIẾT LẬP BỘ NỐI


RT-4527ETRJ

VARIAN ETR



RT-4525L

RT-4527ETRJ

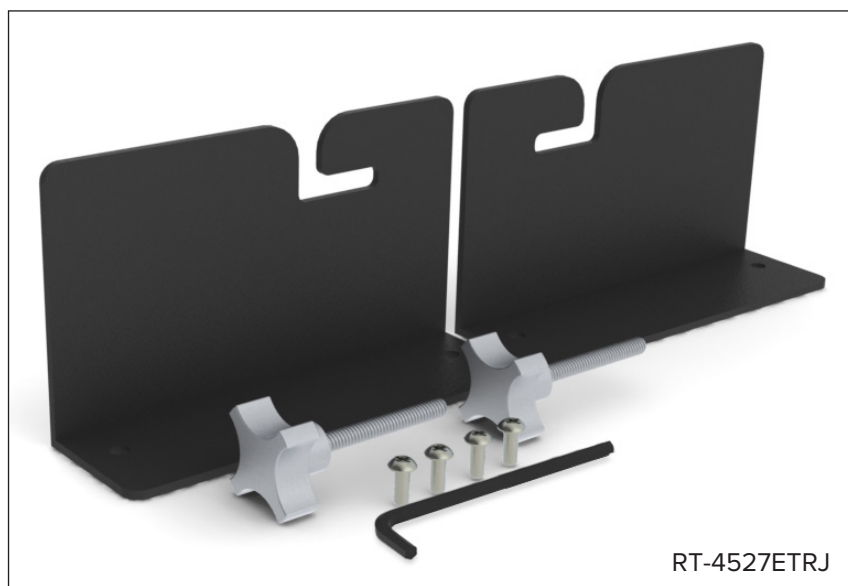

RT-4527ETRJ

THIẾT LẬP BỘ NỐI RT-4527ETRJ


1. Tháo vít Allen thứ ba khỏi đầu trên của giường ETR bằng cách sử dụng Chìa vặn Allen đi kèm. (Hình 39).
 2. Lắp lại ở phía đối diện của giường.
 3. Thay vít Allen bằng nút đi kèm. Nút này phải được giữ cố định như một phần của giường. Không siết chặt hoàn toàn nút; để lại khoảng cách tầm 0,5 cm (Hình 40).
 4. Lắp lại ở phía đối diện của giường.
 5. Lắp bộ nối vào vị trí được minh họa bên dưới, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít 1/4-20 x 1/2" (Hình 41).
- ! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho đĩa.**
6. Lắp lại việc lắp đặt cho bộ nối bên đối diện (Hình 42).
 7. Lắp thiết bị lên mặt giường bằng cách móc bộ nối vào trục của nút. Siết chặt nút để cố định. (Hình 43)




Hình 39




Hình 40

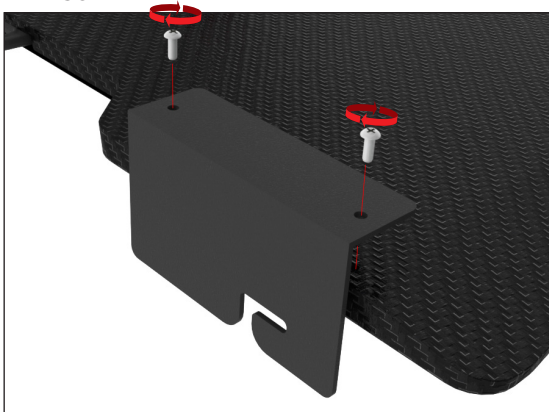

Hình 41

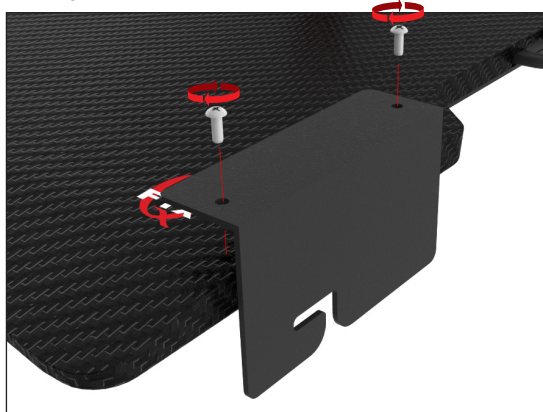

Hình 42

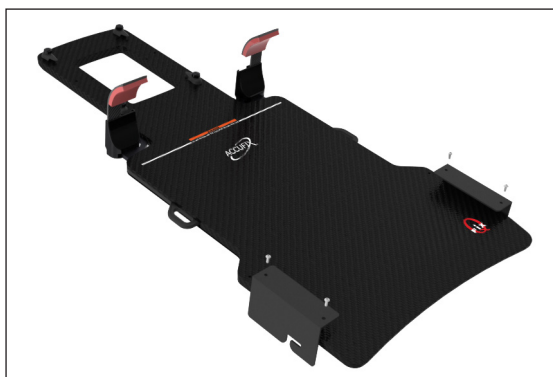


Hình 43

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527EXA475

LỚP PHỦ CT CÓ CHIA VẠCH RỘNG 500 MM KIỂU EXACT® HẸP

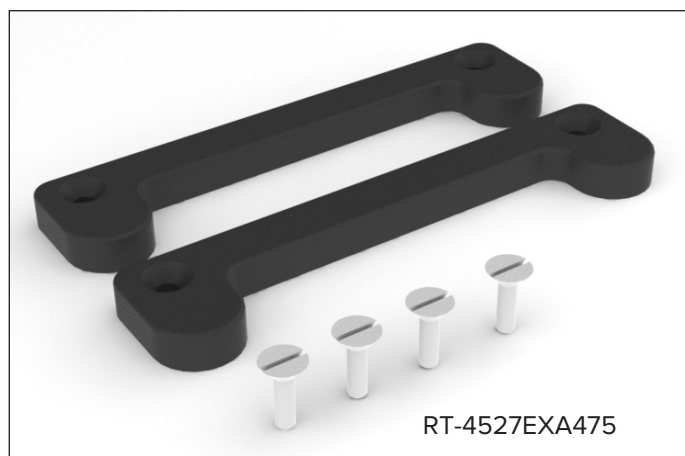

Công cụ cần thiết: Tua vít đầu bẹt



KHÔNG ĐỂ THIẾT BỊ CHÌA RA NGOÀI ĐẦU MẶT GIƯỜNG KHI SỬ DỤNG BỘ NỐI CT NÀY. CHÌA RA NGOÀI ĐẦU MẶT GIƯỜNG CÓ THỂ KHIẾN THIẾT BỊ RƠI KHỎI MẶT GIƯỜNG, LÀM BỆNH NHÂN BỊ THƯƠNG.

THIẾT LẬP BỘ NỐI

RT-4527EXA475

1. Lắp bộ nối vào vị trí được minh họa bên dưới, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít 1/4-20 x 3/4" (Hình 44).

! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho đĩa.

2. Lắp lại việc lắp đặt cho bộ nối bên đối diện (Hình 45).

3. Lắp đặt thiết bị lên mặt giường bằng cách căn chỉnh bộ nối với các rãnh chia độ. Ấn thiết bị xuống cho đến khi thiết bị chắc chắn.



Hình 44




Hình 45



Hình 46

THIẾT LẬP BỘ NỐI RT-4527PETCT

LỚP PHỦ PET/CT RỘNG 480 MM CỦA PHILIPS GEMINI™ VÀ GE
DISCOVERY™ LS

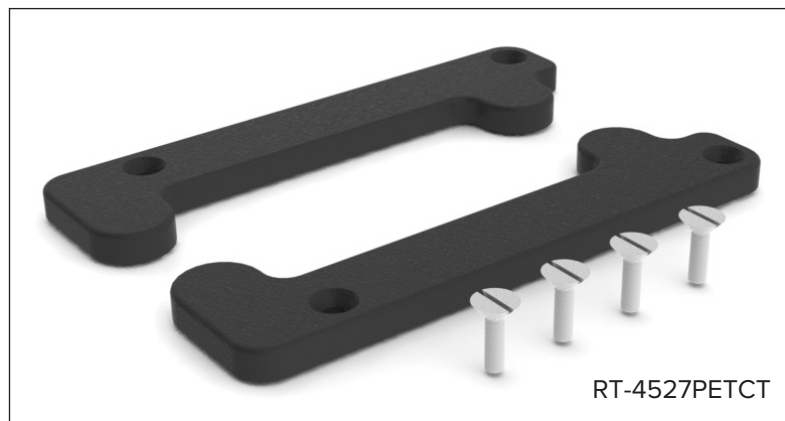

Công cụ cần thiết: Tua vít đầu bẹt



KHÔNG ĐỂ THIẾT BỊ CHÌA RA NGOÀI ĐẦU MẶT GIƯỜNG KHI SỬ DỤNG BỘ NỐI CT NÀY. CHÌA RA NGOÀI ĐẦU MẶT GIƯỜNG CÓ THỂ KHIẾN THIẾT BỊ RƠI KHỎI MẶT GIƯỜNG, LÀM BỆNH NHÂN BỊ THƯƠNG.

THIẾT LẬP BỘ NỐI RT-4527PETCT

1. Lắp bộ nối vào vị trí được minh họa bên dưới, trong hai lỗ cách nhau 140 mm (5,5"), sử dụng 2 vít 1/4-20 x 3/4" (Hình 47).


! LƯU Ý ! Không quan trọng là bộ lỗ nào được sử dụng, tuy nhiên, nếu có lắp Tấm tay nắm, hãy sử dụng bộ lỗ có sẵn cho đĩa.

2. Lắp lại việc lắp đặt cho bộ nối bên đối diện (Hình 48).

3. Lắp đặt thiết bị lên mặt giường bằng cách căn chỉnh bộ nối với các rãnh chia độ. Ấn thiết bị xuống cho đến khi thiết bị chắc chắn.



Hình 47

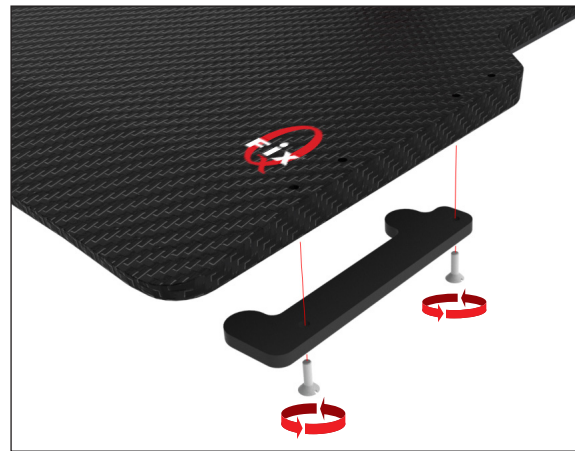

Hình 48



Hình 49

LẮP ĐẶT MIẾNG CHÊM

RT-4527PETCT

RT-4527EXA (Hình 50)

1. Tháo 2 vít cố định bộ nối vào Tấm tay nắm.
2. Đặt miếng chêm vào giữa bộ nối và tấm tay nắm, căn chỉnh các lỗ vít với các lỗ trên miếng chêm.
3. Lắp lại hai vít cho đến khi chắc chắn.
4. Tiếp tục với hướng dẫn thiết lập.

RT-4527LMI3 (Hình 51)

1. Tháo 2 vít cố định bộ nối vào Tấm tay nắm.
2. Đặt miếng chêm vào giữa bộ nối và tấm tay nắm, căn chỉnh các lỗ vít với các lỗ trên miếng chêm.
3. Lắp lại hai vít cho đến khi chắc chắn.
4. Tiếp tục với hướng dẫn thiết lập.



Hình 50



Hình 51



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com