



PANDUAN PRODUK & BUKU PANDUAN PENGGUNA

RT-4464-02

Papan Perut SofTouch Elite™



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Exact® adalah merek dagang terdaftar dari Varian Medical Systems.

Cidex® & Windex® adalah merek dagang terdaftar dari Johnson & Johnson.

Clorox® adalah merek dagang terdaftar dari The Clorox Company.

SofTouch Elite adalah merek dagang dari Qfix.

TINDAKAN Pencegahan Umum

PERNYATAAN PERINGATAN

! PERINGATAN ! PERALATAN INI TIDAK BOLEH DIMODIFIKASI. JIKA BAGIAN APA PUN DARI PERANGKAT INI MENGALAMI BEBAN BERLEBIHAN, TERLIHAT RUSAK, ATAU TIDAK BERFUNGSI DENGAN BENAR, SEGERA HENTIKAN PENGGUNAAN DAN HUBUNGI CQ MEDICAL DI +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ATAU SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! PERINGATAN ! SKALA DI PAPAN PERUT SOFTOUCH ELITE HANYA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI REFERENSI.

! PERINGATAN ! JANGAN BIARKAN PASIEN MENYESUAIKAN POSISINYA MENGGUNAKAN PEGANGAN TANGAN GANDA.

! CATATAN ! Papan Perut SofTouch Elite harus selalu disangga sepenuhnya oleh permukaan bagian atas dipan.

! CATATAN ! JANGAN meletakkan benda tajam di atas SofTouch Elite.

KEJADIAN SERIUS

Harap laporkan kejadian serius apa pun (misalnya, kejadian yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kematian atau cedera serius) baik kepada CQ Medical maupun Pihak Berwenang di negara Anda.

LABEL PERINGATAN & DESKRIPSI

Lihat CQmedical.com untuk daftar simbol dan definisinya.



MR AMAN

Item yang tidak menimbulkan bahaya yang diketahui akibat paparan terhadap lingkungan MR. Item MR Aman tersusun dari bahan yang nonkonduktif, nonlogam, dan nonmagnetik secara elektrik.

TUJUAN PENGGUNAAN

Perangkat ini ditujukan untuk mencegah pergerakan, memosisikan, dan memosisikan ulang pasien yang sedang menjalani terapi radiasi.

! CATATAN ! Undang-undang federal Amerika Serikat membatasi penjualan perangkat ini hanya oleh atau atas perintah dokter.

KELOMPOK SASARAN PASIEN


Pasien yang sedang menjalani terapi radiasi atau prosedur pencitraan diagnostik.

PENGGUNA YANG DITUJU

Pengguna yang dituju untuk produk ini adalah orang yang berkualifikasi berdasarkan persyaratan di wilayah regulasi.

FITUR

KOMPONEN

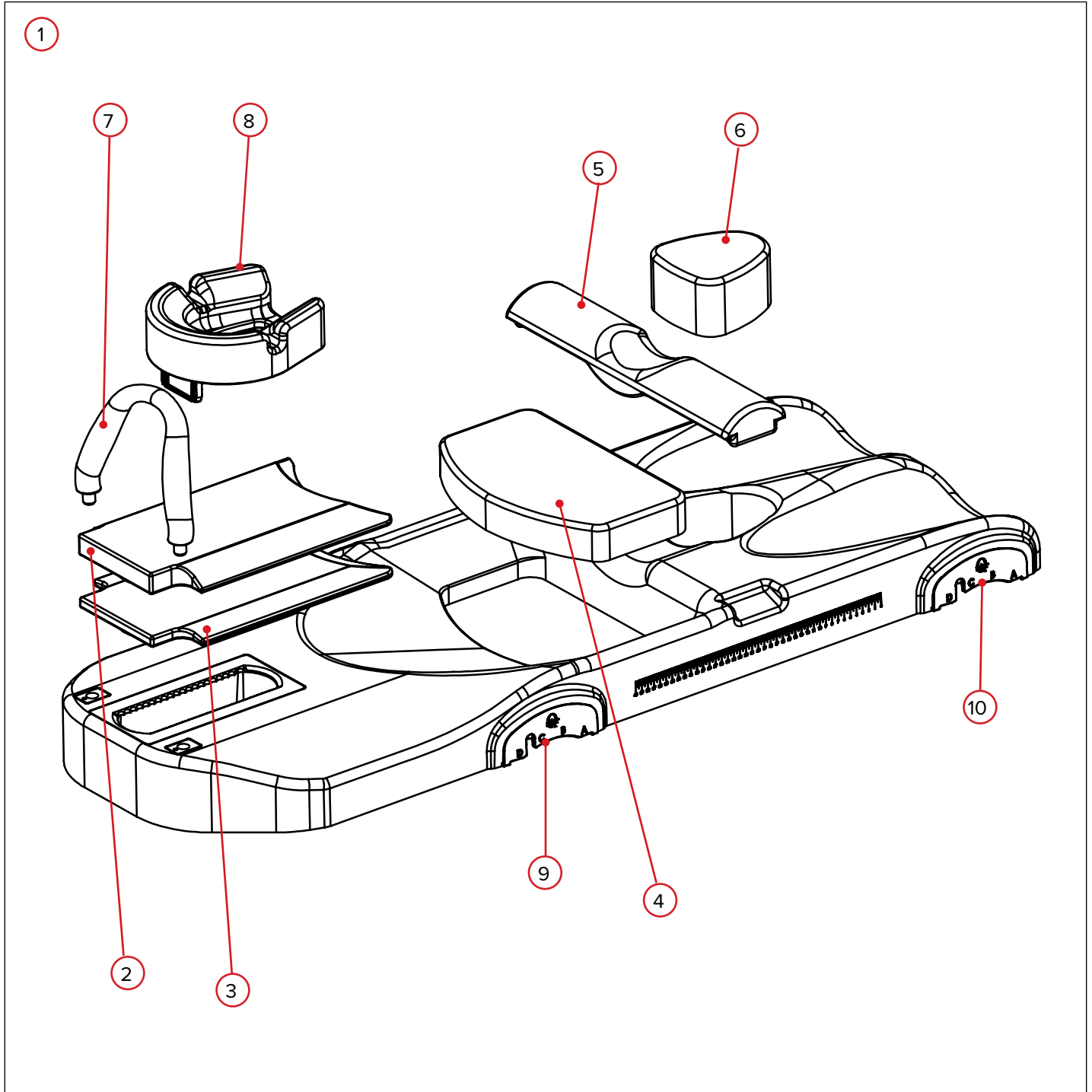

FITUR

KOMPONEN

1. SISTEM PAPAN PERUT SOFTOUCH ELITE™

Papan Perut SofTouch Elite digunakan untuk memudahkan pemosisian dan penyiapan pasien yang sedang menjalani radioterapi di area panggul. SofTouch Elite mengurangi volume usus halus di bidang radiasi, sehingga meningkatkan hasil perawatan pasien.

2. BANTALAN H30

Bantal kepala 30 mm digunakan untuk memberikan kenyamanan tambahan bagi pasien. Bantal kepala 15 mm juga dapat digunakan, tergantung pada tingkat kenyamanan pasien.

3. BANTALAN H15

Bantal kepala 15 mm digunakan untuk memberikan kenyamanan tambahan bagi pasien. Bantal kepala 30 mm juga dapat digunakan, tergantung pada tingkat kenyamanan pasien.

4. BANTALAN B50

Bantal perut 50 mm digunakan untuk memberikan kenyamanan bagi pasien dengan meninggikan perut pasien agar lebih nyaman. Bantal ini terutama digunakan pada pasien dengan ukuran perut yang lebih kecil.

5. BANTALAN C30

Bantal kaudal 30 mm digunakan untuk meninggikan panggul dan memberikan kenyamanan tambahan bagi pasien. Bantal ini juga memungkinkan usus bergeser ke depan untuk perawatan yang lebih baik.

6. BANTALAN G80

Bantal 80 mm memberikan kenyamanan tambahan bagi pasien.

7. PEGANGAN TANGAN GANDA

Pegangan Tangan Ganda dirancang secara ergonomis untuk mengurangi ketegangan di pergelangan tangan pasien, tidak seperti gagang standar yang digunakan dengan perangkat lainnya.

8. SANDARAN KEPALA TENGKURAP

SofTouch Elite dilengkapi dengan sandaran kepala tengkurap yang dapat diindeks ke SofTouch Elite di beberapa lokasi, tergantung pada tinggi dan kenyamanan pasien.

9. PELAT PENGINDEKSAN SUPERIOR

SofTouch Elite dilengkapi dengan Pelat Pengindeksan yang dapat dipasang ke kVue menggunakan Bilah Pengaturan Lokasi 2 Pin. Pelat ini berada di ujung superior dari SofTouch Elite.


10. PELAT PENGINDEKSAN INFERIOR

SofTouch Elite dilengkapi dengan Pelat Pengindeksan yang dapat dipasang ke kVue menggunakan Bilah Pengaturan Lokasi 2 Pin. Pelat ini berada di ujung inferior dari SofTouch Elite.

PETUNJUK PENGOPERASIAN

PEMASANGAN SOFTOUCH ELITE

1. Masukkan ujung-ujung semua Bilah Pengaturan Lokasi 2 pin ke dalam takik indeks kompatibel Varian Exact® di Overlay CT atau Sisipan kVue, dengan menempatkannya pada jarak 700 mm, dan kencangkan Bilah Pengaturan Lokasi ke tempatnya (Gbr. 1 & Gbr. 2).

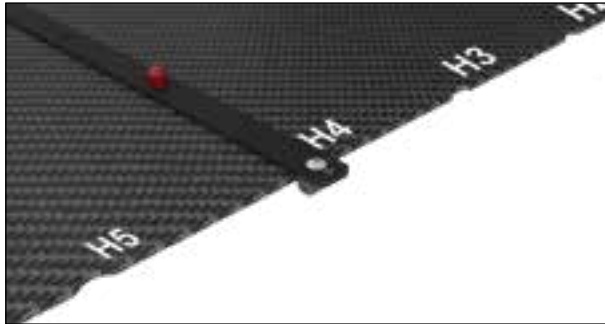


Gbr. 1



Gbr. 2

2. Tempatkan SofTouch Elite pada Overlay CT menggunakan Pelat Pengindeksan untuk mengindeks ke Bilah Pengaturan Lokasi 2 pin. Pastikan untuk mengindeks SofTouch Elite menggunakan lokasi yang sama (A, B, C, D) pada bagian inferior dan superior (Gbr. 3).

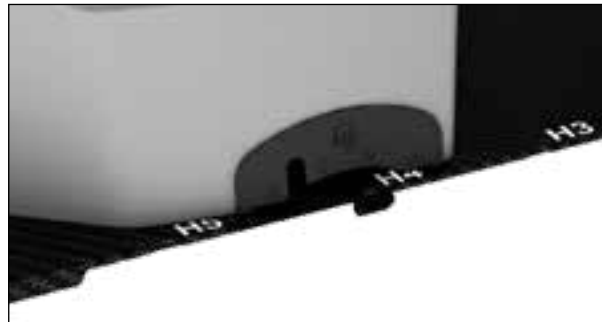

Gbr. 3

PEMASANGAN PEGANGAN TANGAN GANDA

1. Sejajarkan ujung-ujung Pegangan Tangan dengan lubang yang sesuai di ujung superior SofTouch Elite.
2. Dorong Pegangan Tangan ke bawah hingga terkunci pada lubang.

! CATATAN ! Pegangan Tangan harus melengkung ke arah pasien.

PELEPASAN

Untuk melepaskan Pegangan Tangan, tarik ke atas hingga terlepas dari lubang.

PEMELIHARAAN

MEMBERSIHKAN SISTEM

Perangkat dapat dibersihkan menggunakan larutan pembersih atau disinfektan ringan dan non-abrasif. Basahi kain bersih dengan larutan dan seka permukaan untuk membersihkannya. Amati perangkat untuk memastikan kebersihannya. Jika belum bersih, ulangi langkah pembersihan sebelumnya hingga benar-benar bersih. Gunakan kain bersih yang dibasahi dengan sedikit air untuk menyeka dan membersihkan perangkat dari sisa bahan pembersih. Seka dengan kain bersih dan kering untuk mengeringkan perangkat. Bahan pembersih berikut telah diuji dan dianggap sesuai untuk membersihkan perangkat.

- Air
- Sabun dan Air

MENDISINFEKSI SISTEM


Untuk mendisinfeksi permukaan perangkat, baca petunjuk khusus dari produsen bahan pembersih.

- Larutan Pemutih Clorox® 10%
- Isopropil Alkohol
- Larutan Dialdehida Teraktifkan Cidex® 2,4%

PENYIMPANAN

Simpan perangkat di permukaan horizontal yang rata atau menggantung secara vertikal dariudukan dinding.


DAFTAR KOMPONEN

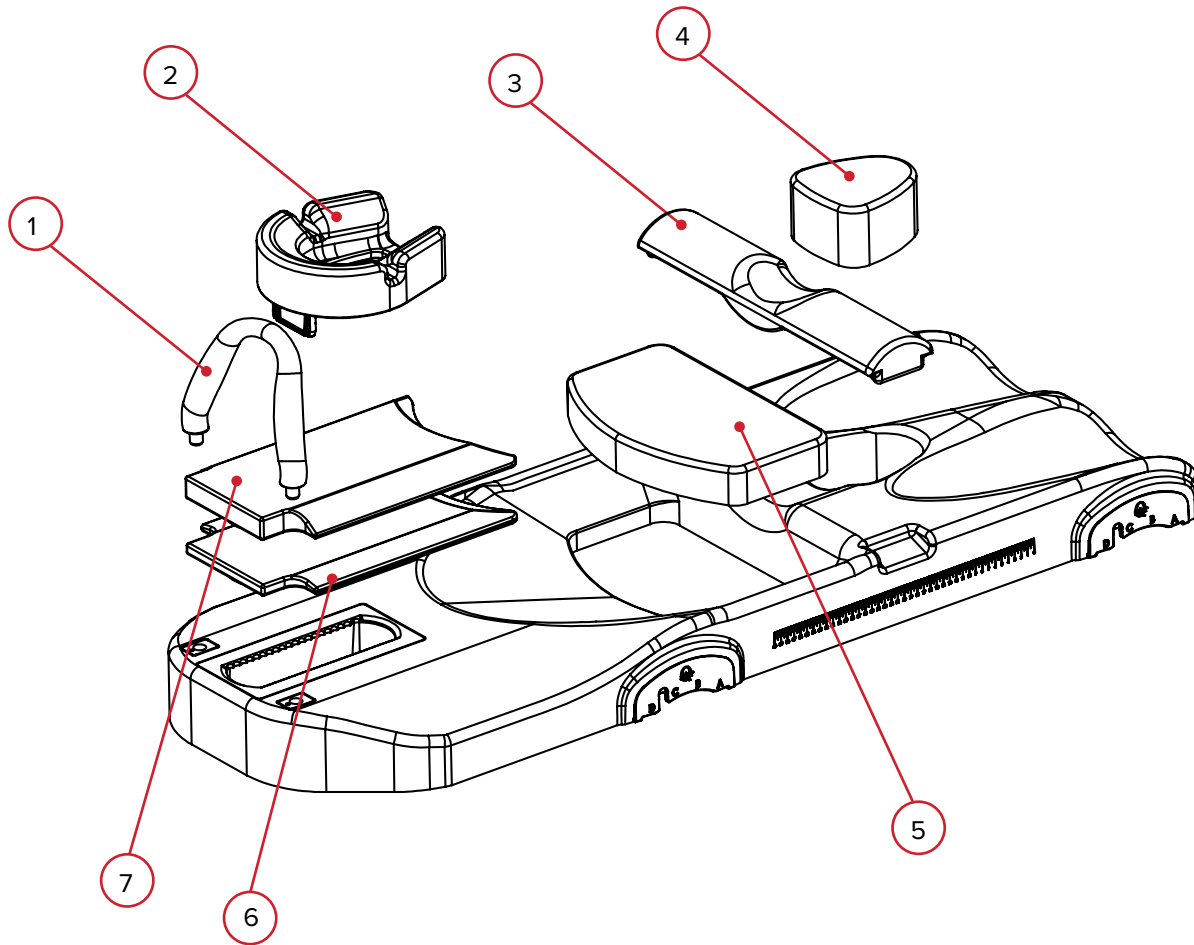

1. RT-4544KV-04 – Pegangan Tangan Ganda
2. RT-4544KV-06 – Sandaran Kepala Tengkurap
3. 2002825 – Bantalan C30
4. 2002826 – Bantalan G80
5. 2002824 – Bantalan B50
6. 2002822 – Bantalan H15
7. 2002823 – Bantalan H30

RT-4464-02 – PAPAN PERUT SOFTOUCH ELITE

Komentar:

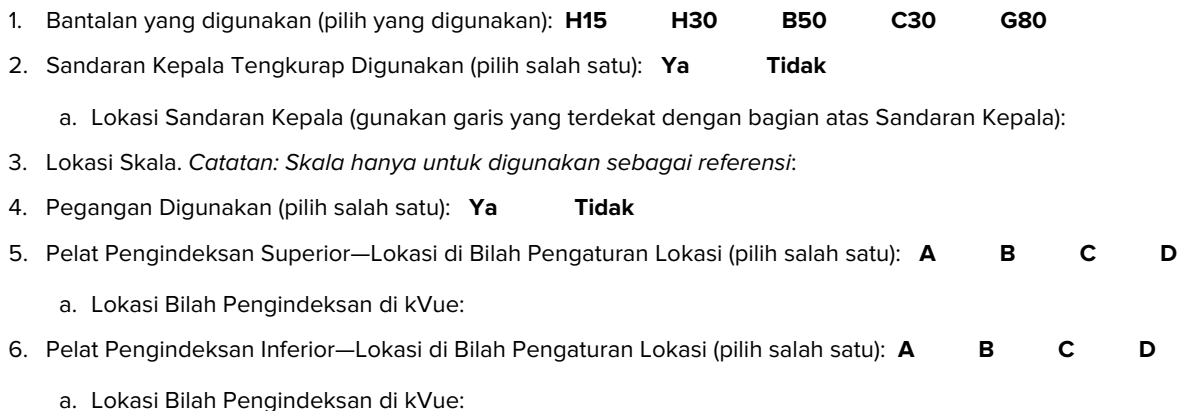



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com