



positioning
patients for life.®

PRODUKTFÜHRER UND BEDIENERHANDBUCH

RT-4551BAR-01

Verschiebbare Indexschiene





Hergestellt in den USA von

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com

Exact® ist eine eingetragene Marke von Varian Medical Systems.

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN	4
WARNHINWEISE.....	4
SCHWERWIEGENDE EREIGNISSE.....	4
PATIENTEN-ZIELGRUPPEN	4
VORGESEHENE ANWENDER	4
WARNSCHILDER UND BESCHREIBUNGEN	4
BEDIENUNGSANLEITUNG.....	5
EINRICHTUNG	5
DEMONTAGE	7

ALLGEMEINE VORSICHTS- MASSNAHMEN

WARNHINWEISE

! WARNUNG ! DIESE VORRICHTUNG DARF NICHT MODIFIZIERT WERDEN. FALLS IRGEND EIN TEIL DIESER VORRICHTUNG EINER BEDENKLICH HOHEN LAST AUSGESETZT WURDE, ANSCHEINEND BESCHÄDIGT IST ODER NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, BRECHEN SIE DIE VERWENDUNG UNVERZÜGLICH AB UND SETZEN SIE SICH MIT QFIX UNTER +1 484-720-6054 ODER TECHSUPPORT@QFIX.COM IN VERBINDUNG.

! WARNUNG ! DIE VERSCHIEBBARE INDEXSCHIENE ERMÖGLICHT DIE MONTAGE VON VORRICHTUNGEN IN EINER VERSETZTEN SEITLICHEN POSITION. DIESE VERSETZTE POSITION SOLLTE BEI DER PLANUNG UND BESTRAHLUNG BERÜCKSICHTIGT WERDEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE ROTEN ZAPFEN VOLLSTÄNDIG EINGERASTET SIND, BEVOR EINE VORRICHTUNG AN DER VERSCHIEBBAREN INDEXSCHIENE ANGEBRACHT WIRD.

SCHWERWIEGENDE EREIGNISSE

Bitte melden Sie jegliche schwerwiegenden Ereignisse (z. B. Ereignisse, die zum Tod oder zu schweren Schädigungen führen oder führen können) sowohl Qfix als auch der zuständigen Behörde in Ihrem Land.

PATIENTEN-ZIELGRUPPEN

Patienten, die einer Strahlentherapie oder bildgebenden diagnostischen Verfahren unterzogen werden.

VORGESEHENE ANWENDER

Der für dieses Produkt vorgesehene Anwender ist eine gemäß den Anforderungen der regulatorischen Region qualifizierte Person.

WARNSCHILDER UND BESCHREIBUNGEN

Eine Auflistung der Symbole und ihrer Definitionen kann unter Qfix.com abgerufen werden.



BEDIENUNGSANLEITUNG

EINRICHTUNG

MONTAGE DER INDEXSCHIENE

Auf der verschiebbaren Indexschiene befinden sich zwei Fixierstifte, die für das meiste Standard-Positionierzubehör passend sind. Zum Anbringen der verschiebbaren Indexschiene legen Sie die beiden Enden der Schiene in die entsprechenden, mit Varian Exact® kompatiblen Indexkerben und lassen dann die Schiene einrasten.

Nahaufnahme der Positionierungsmarkierung

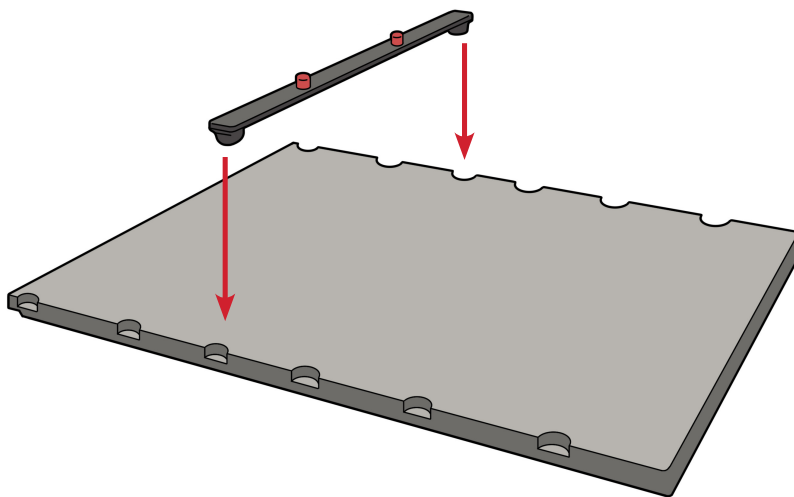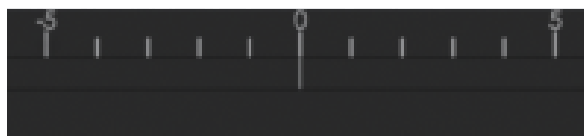

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINRICHTUNG

MONTAGE DER INDEXSCHIENE

1. Lösen Sie die roten Zapfen durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 1).
2. Schieben Sie die Zapfen in die gewünschte Position (Abb. 2 und 3).
3. Drehen Sie die Zapfen im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln (Abb. 4).

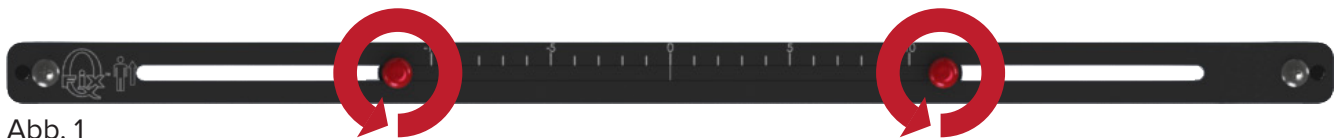


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

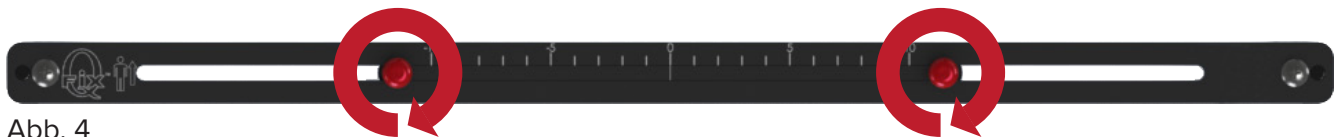


Abb. 4

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEMONTAGE

DEMONTAGE DER INDEXSCHIENE

Ziehen Sie ein Ende der Indexschiene nach oben.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com