



positioning
patients for life.®

GUIDE PRODUIT ET MANUEL DE L'UTILISATEUR

RT-4551BAR-01

Barre de positionnement coulissante





Fabriqué aux États-Unis par

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com

Exact® est une marque déposée de Varian Medical Systems.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES.....	4
AVERTISSEMENTS.....	4
INCIDENTS GRAVES	4
GROUPES CIBLES DE PATIENTS.....	4
UTILISATEURS PRÉVUS.....	4
ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DESCRIPTIONS.....	4
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	5
INSTALLATION.....	5
RETRAIT.....	7

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENTS

! AVERTISSEMENT ! AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE. SI UNE PARTIE QUELCONQUE DE CE DISPOSITIF SUBIT UNE CHARGE EXCESSIVE DANS UN CONTEXTE D'ÉVÉNEMENT CATASTROPHIQUE, SEMBLE ENDOMMAGÉE OU FONCTIONNE MAL, INTERROMPRE IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET CONTACTER QFIX AU +1 484-720-6054 OU À L'ADRESSE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! AVERTISSEMENT ! LA BARRE DE POSITIONNEMENT COULISSANTE PERMET D'INSTALLER LES DISPOSITIFS DANS UNE POSITION LATÉRALE DÉCALÉE. CETTE POSITION DÉCALÉE DOIT ÊTRE PRISE EN COMPTE PENDANT LA PLANIFICATION ET LE TRAITEMENT. S'ASSURER QUE LES BROCHES ROUGES SONT BIEN VERROUILLÉES AVANT D'INSTALLER UN DISPOSITIF SUR LA BARRE DE POSITIONNEMENT COULISSANTE.

INCIDENTS GRAVES

Veuillez signaler tout incident grave (par ex. incidents provoquant ou pouvant provoquer la mort ou des blessures graves) à Qfix ainsi qu'aux autorités compétentes de votre pays.

GROUPES CIBLES DE PATIENTS

Patients en radiothérapie ou suivant des procédures d'imagerie diagnostique.

UTILISATEURS PRÉVUS

L'utilisateur prévu pour les produits est une personne qualifiée selon les exigences de la région de réglementation.

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DESCRIPTIONS

Consulter Qfix.com pour obtenir une liste des symboles et de leur définition.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

INSTALLATION DE LA BARRE DE POSITIONNEMENT

La barre de positionnement coulissante est dotée de deux broches de positionnement qui peuvent accueillir la plupart des accessoires de positionnement standard. Pour la fixer, placer l'une de ses extrémités dans les encoches de repérage appropriées compatibles avec Varian Exact®, puis l'enclencher en position.

Vue rapprochée du repère de positionnement

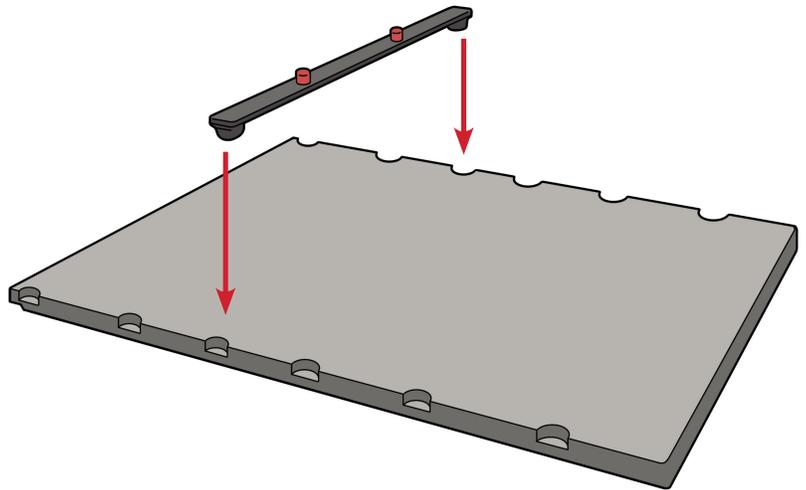

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

INSTALLATION DE LA BARRE DE POSITIONNEMENT

1. Desserrer les broches rouges en les tournant dans le sens antihoraire (Figure 1).
2. Faire glisser les broches vers la position souhaitée (Figures 2 et 3).
3. Verrouiller les broches en les tournant dans le sens horaire (Figure 4).

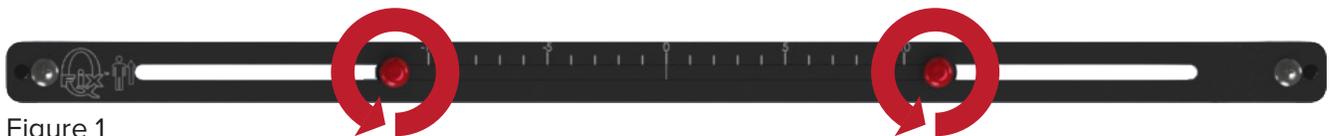


Figure 1



Figure 2



Figure 3

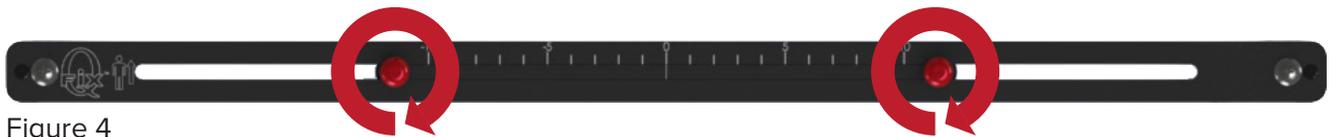


Figure 4

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RETRAIT

RETRAIT DE LA BARRE DE POSITIONNEMENT

Tirer l'une des extrémités de la barre de positionnement vers le haut.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com