



positioning  
patients for life.®

# GUIDA DEL PRODOTTO E MANUALE D'USO

RT-4551BAR-01

Barra di posizionamento scorrevole





Exact® è un marchio registrato di Varian Medical Systems.

# SOMMARIO

PRECAUZIONI GENERALI .....	4
AVVERTENZE .....	4
INCIDENTI GRAVI.....	4
GRUPPI DI PAZIENTI DESTINATARI .....	4
UTILIZZATORI PREVISTI.....	4
ETICHETTE DI AVVERTENZA E DESCRIZIONI.....	4
ISTRUZIONI PER L'USO .....	5
APPRONTAMENTO .....	5
RIMOZIONE .....	7

# PRECAUZIONI GENERALI

## AVVERTENZE

**! AVVERTENZA ! NON È CONSENTITA ALCUNA MODIFICA DI QUESTA APPARECCHIATURA. SE UNA QUALSIASI PARTE DEL DISPOSITIVO È SOTTOPOSTA A CARICHI ESTREMI, APPARE DANNEGGIATA O FUNZIONA IN MODO ERRATO, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO E CONTATTARE QFIX AL NUMERO +1 484-720-6054 O ALL'INDIRIZZO TECHSUPPORT@QFIX.COM.**

**! AVVERTENZA ! LA BARRA DI POSIZIONAMENTO SCORREVOLE CONSENTE DI INSTALLARE I DISPOSITIVI IN POSIZIONE LATERALE SPORGENTE. TALE POSIZIONE DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE DURANTE LA PIANIFICAZIONE E IL TRATTAMENTO. ASSICURARSI CHE I PERNI ROSSI SIANO COMPLETAMENTE BLOCCATI PRIMA DI INSTALLARE UN DISPOSITIVO SULLA BARRA DI POSIZIONAMENTO SCORREVOLE.**

## INCIDENTI GRAVI

Segnalare eventuali incidenti gravi (ad es. incidenti che comportano o che possono provocare lesioni gravi o mortali) sia a Qfix sia all'autorità competente del proprio Paese.

## GRUPPI DI PAZIENTI DESTINATARI

Pazienti sottoposti a radioterapia o a procedure di diagnostica per immagini.

## UTILIZZATORI PREVISTI

L'utilizzatore previsto per i prodotti è una persona qualificata in conformità ai requisiti dell'area geografica di regolamentazione.

## ETICHETTE DI AVVERTENZA E DESCRIZIONI

Consultare [Qfix.com](http://Qfix.com) per un elenco dei simboli e le relative definizioni.


# ISTRUZIONI PER L'USO

## APPRONTAMENTO

### INSTALLAZIONE DELLA BARRA DI POSIZIONAMENTO

La barra di posizionamento scorrevole è dotata di due perni che si abbinano alla maggior parte degli accessori standard di posizionamento. Per il fissaggio, posizionare una delle estremità della barra di posizionamento scorrevole nelle tacche di allineamento compatibili con Varian Exact® e farla scattare in posizione.

Primo piano del contrassegno di posizionamento

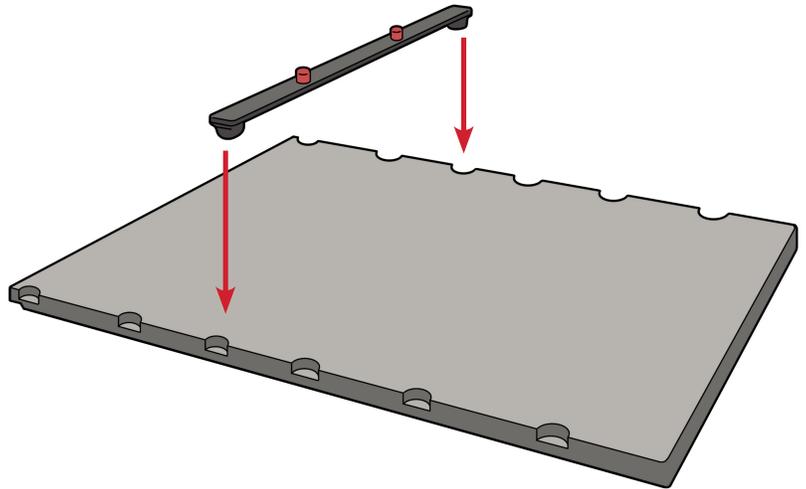

# ISTRUZIONI PER L'USO

## APPONTAMENTO

### INSTALLAZIONE DELLA BARRA DI POSIZIONAMENTO

1. Allentare i perni rossi ruotando in senso antiorario (Fig. 1).
2. Far scorrere i perni nella posizione desiderata (Fig. 2 e 3).
3. Bloccare i perni ruotando in senso orario (Fig. 4).

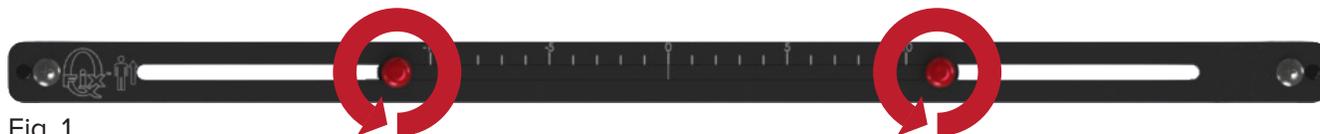


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

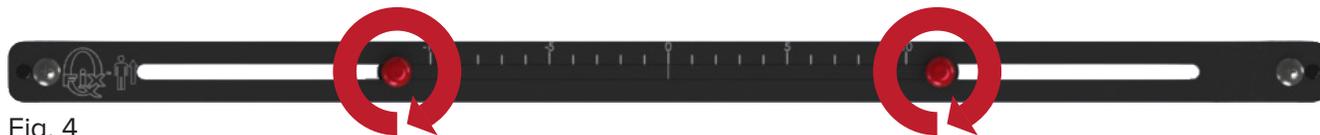


Fig. 4

# ISTRUZIONI PER L'USO

## RIMOZIONE

### RIMOZIONE DELLA BARRA DI POSIZIONAMENTO

Sollevarne una delle estremità della barra di posizionamento.



440 Church Road  
Avondale, PA 19311 USA  
[www.Qfix.com](http://www.Qfix.com)

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 [sales@Qfix.com](mailto:sales@Qfix.com)