



positioning
patients for life.®

PRODUCTHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

RT-4551BAR-01

Schuifstang





Vervaardigd in de VS door

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com

Exact® is een gedeponeerd handelsmerk van Varian Medical Systems.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN	4
WAARSCHUWINGEN	4
ERNSTIGE INCIDENTEN.....	4
PATIËTENDOELGROEPEN.....	4
BEOOGDE GEBRUIKERS	4
WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN	4
BEDIENINGSINSTRUCTIES.....	5
OPSTELLEN	5
VERWIJDEREN.....	7

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGEN

! WAARSCHUWING ! AANPASSING VAN DEZE APPARATUUR IS NIET TOEGESTAAN. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL EEN TE GROTE BELASTING ONDERVINDT, BESCHADIGD LIJKT OF NIET GOED FUNCTIONEERT, DIENT U HET HULPMIDDEL NIET LANGER TE GEBRUIKEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET QFIX VIA +1 484-720-6054 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! WAARSCHUWING ! MET DE SCHUIFSTANG KUNNEN HULPMIDDELEN IN EEN ZIJWAARTS VERSCHOVEN POSITIE WORDEN GEMONTEERD. TIJDENS DE PLANNING EN BEHANDELING MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DEZE ZIJWAARTS VERSCHOVEN POSITIE. ZORG ERVOOR DAT DE RODE PENNEN VOLLEDIG ZIJN VERGRENDELD VOORDAT U EEN APPARAAT OP DE SCHUIFSTANG PLAATST.

ERNSTIGE INCIDENTEN

Meld ernstige incidenten (bijvoorbeeld incidenten die dodelijk of ernstig letsel als gevolg (kunnen) hebben) bij zowel Qfix als de bevoegde autoriteit van uw land.

PATIËNTENDOELGROEPEN

Patiënten die bestralingstherapie of diagnostische beeldvormingsprocedures ondergaan.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De beoogde gebruiker van de producten is iemand die in aanmerking komt volgens de eisen van het regelgevingsgebied.

WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN

Ga naar Qfix.com voor een lijst met symbolen en de bijbehorende definities.



BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLEN

INSTALLATIE VAN DE SCHUIFSTANG

De schuifstang heeft twee positioneringspennen die passen bij de meeste standaardaccessoires voor positionering. Plaats om te bevestigen een van de uiteinden van de schuifstang in de juiste indexinkepingen die compatibel zijn met Varian Exact® en klik deze vast.

Close-up van positioneringsmarkering



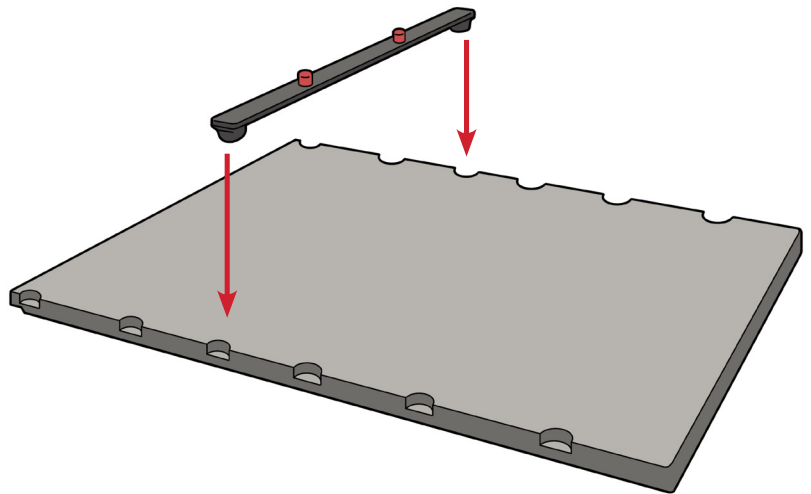
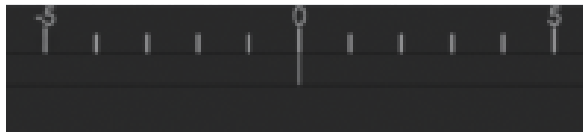


BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLEN

INSTALLATIE VAN DE SCHUIFSTANG

1. Draai de rode pennen los door ze linksom te draaien (afb. 1).
2. Schuif de pennen naar de gewenste positie (afb. 2 en 3).
3. Vergrendel de pennen door ze rechtsom te draaien (afb. 4).

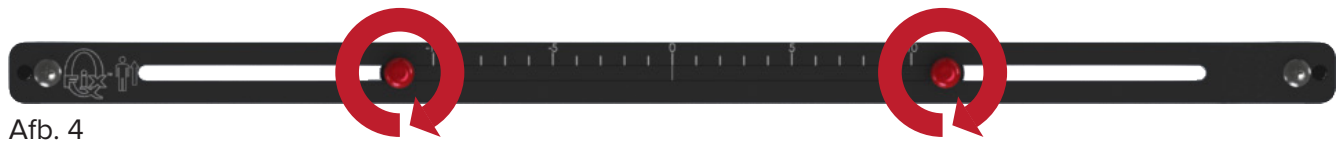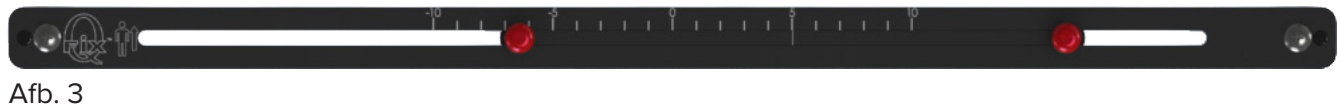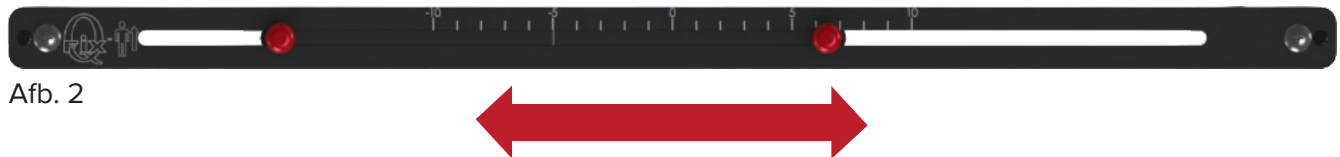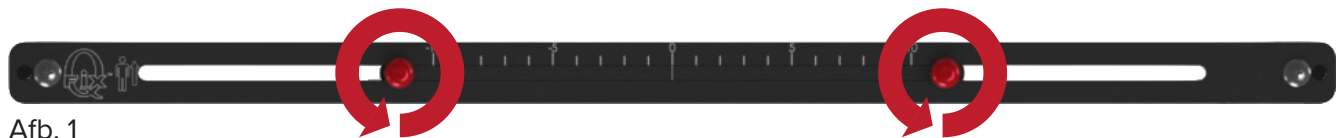

BEDIENINGSINSTRUCTIES

VERWIJDEREN

HET VERWIJDEREN VAN DE SCHUIFSTANG

Trek een van beide uiteinden van de schuifstang omhoog.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2003916_NL_A
2023-04