

GHIDUL PRODUSULUI ȘI MANUALUL DE UTILIZARE

RT-4551BAR-01

Bară de localizare de glisare





Fabricat în SUA de

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com

Exact® este o marcă comercială înregistrată a Varian Medical Systems.

CUPRINS

MĂSURI GENERALE DE PRECAUȚIE	4
DECLARAȚII DE AVERTIZARE.....	4
INCIDENTE GRAVE.....	4
GRUPURI ȚINTĂ DE PACIENȚI.....	4
UTILIZATORI ȚINTĂ	4
ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI.....	4
INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	5
CONFIGURARE.....	5
DEMONTARE.....	7

MĂSURI GENERALE DE PRECAUȚIE

DECLARAȚII DE AVERTIZARE

! AVERTISMENT ! NU SE PERMITE NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT. DACĂ ORICARE DINTRE COMPONENTELE ACESTUI DISPOZITIV ESTE SUPUSĂ LA O SARCINĂ EXTREM DE MARE, ESTE DETERIORATĂ SAU FUNCȚIONEAZĂ INADECVAT, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ȘI CONTACTAȚI QFIX LA +1 484-720-6054 SAU LA TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! AVERTISMENT ! BARA DE LOCALIZARE GLISANTĂ PERMITE DISPOZITIVELOR SĂ FIE INSTALATE ÎNTR-O POZIȚIE LATERALĂ DEVIATĂ. POZIȚIA DEVIATĂ TREBUIE SĂ FIE LUATĂ ÎN CALCUL ÎN TIMPUL PLANIFICĂRII ȘI TRATAMENTULUI. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ȘTIFTURILE ROȘII SUNT COMPLET BLOCATE ÎNAINTE DE INSTALAREA UNUI DISPOZITIV PE BARA DE LOCALIZARE GLISANTĂ.

INCIDENTE GRAVE

Raportați toate incidentele grave (de exemplu, incidente care au rezultat în sau care au potențialul de a rezulta în decese sau vătămări grave) atât către Qfix, cât și către autoritatea competentă din țara dumneavoastră.

GRUPURI ȚINTĂ DE PACIENȚI

Pacienții supuși radioterapiei sau procedurilor de diagnosticare prin imagistică.

UTILIZATORI ȚINTĂ

Utilizatorul țintă pentru produse este o persoană calificată în conformitate cu cerințele regiunii de reglementare.

ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI

Pentru o listă a simbolurilor și definițiile aferente acestora, consultați Qfix.com.



INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

CONFIGURARE

MONTAREA BAREI DE LOCALIZARE

Bara de localizare glisantă are două știfturi de localizare care corespund majorității accesoriilor standard de poziționare. Pentru montare, poziționați unul dintre capetele barei de localizare glisante în canelurile de poziționare Varian Exact® compatibile și fixați-l.

Imagine de aproape a marcajului de poziționare

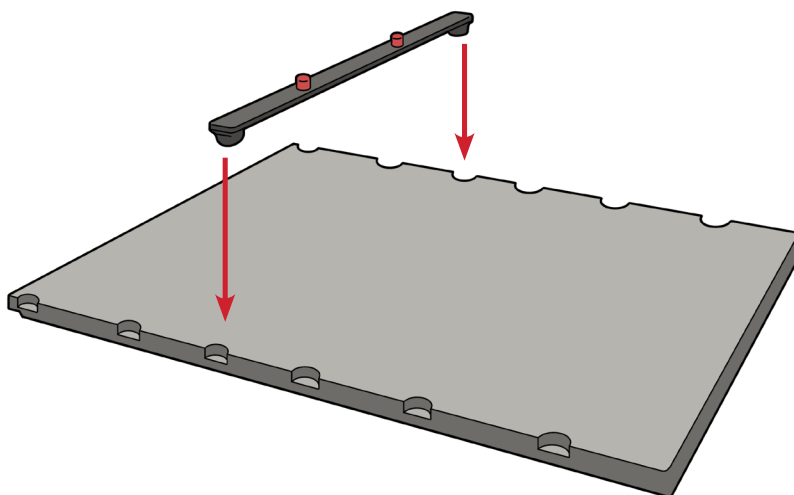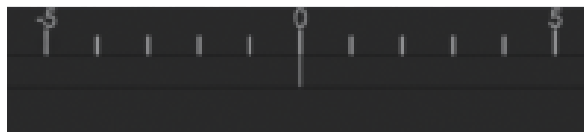

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

CONFIGURARE

MONTAREA BAREI DE LOCALIZARE

1. Slăbiți știfturile roșii prin răsucirea în sens antiorar (fig. 1).
2. Glisați știfturile în poziția dorită (fig. 2 și 3).
3. Blocați știfturile prin rotire în sens orar (fig. 4).

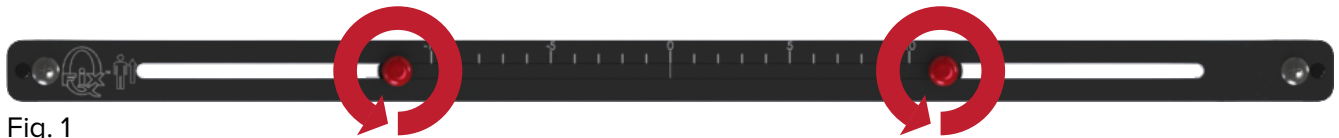


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

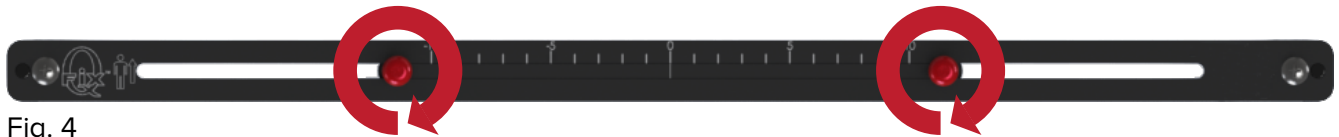


Fig. 4

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

DEMONTARE

DEMONTAREA BAREI DE LOCALIZARE

Trageți de unul dintre capetele barei de localizare.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com