

SPRIEVODCA PRODUKTOM A NÁVOD NA POUŽITIE

RT-4551BAR-01

Posuvné nastavovacie lišty





Vyrobené v USA spoločnosťou

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com

Exact® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Varian Medical Systems.

OBSAH

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	4
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA	4
ZÁVAŽNÉ UDALOSTI	4
CIEĽOVÉ SKUPINY PACIENTOV	4
CIEĽOVÍ POUŽÍVATELIA.....	4
VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY.....	4
NÁVOD NA POUŽITIE	5
NASTAVENIE	5
ODSTRÁNENIE	7

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

! VAROVANIE ! VŠETKY ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TOHTO ZARIADENIA NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 ALEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! VAROVANIE ! POSUVNÁ NASTAVOVACIA LIŠTA UMOŽŇUJE ZARIADENIA NAMONTOVAŤ DO ODSADENEJ BOČNEJ POLOHY. TÚTO ODSADENÚ POZÍCIU TREBA ZOBRAŤ DO ÚVAHY PRI PLÁNOVANÍ A LIEČBE. PRED NAMONTOVANÍM ZARIADENIA NA POSUVNÚ NASTAVOVACIU LIŠTU SA USITITE, ŽE SÚ ČERVENÉ KOLÍKY ÚPLNE ZAISTENÉ.

ZÁVAŽNÉ UDALOSTI

Nahláste všetky závažné udalosti (napríklad udalosti, ktoré viedli k úmrtiu alebo závažnému zraneniu, prípadne k nim mohli viesť) spoločnosti Qfix aj kompetentnému úradu vo vašej krajine.

CIEĽOVÉ SKUPINY PACIENTOV

Pacienti podstupujúci rádioterapiu alebo diagnostické zobrazovacie vyšetrenia.

CIEĽOVÍ POUŽÍVATELIA

Cieľový používateľ výrobkov je osoba kvalifikovaná v súlade s požiadavkami príslušnej regulačnej oblasti.

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke Qfix.com.



NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

MONTÁŽ NASTAVOVACÍCH LÍŠŤ

Posuvná nastavovacia lišta má dva nastavovacie kolíky, ktoré sú vhodné do väčšiny štandardného polohovacieho príslušenstva. Ak chcete lištu pripojiť, vložte oba konce posuvnej nastavovacej lišty do príslušných polohovacích zárezov kompatibilných so zariadením Varian Exact® a zaistite ich na mieste.

Označenia polohy zblízka

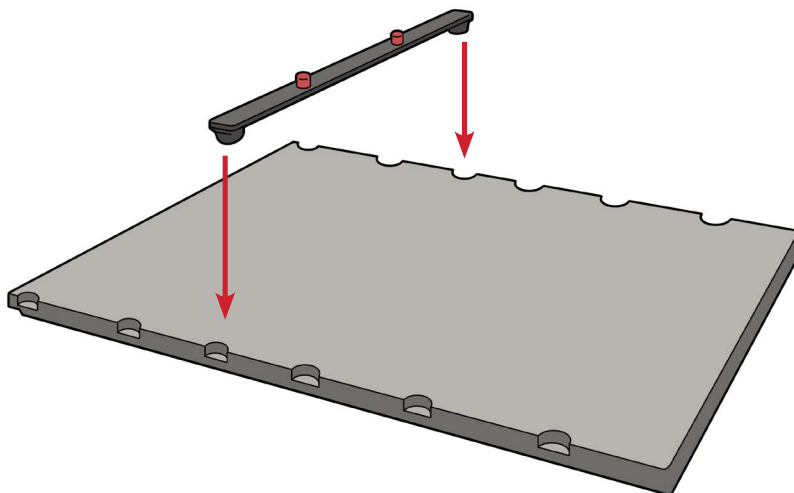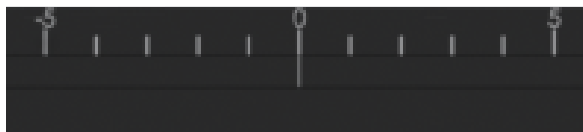

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

MONTÁŽ NASTAVOVACÍCH LÍŠŤ

1. Červené kolíky uvoľníte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (obr. 1).
2. Posuňte kolíky do požadovanej polohy (obr. 2 a 3).
3. Kolíky zaistíte otáčaním v smere hodinových ručičiek (obr. 4).



NÁVOD NA POUŽITIE

ODSTRÁNENIE

ODSTRÁNENIE NASTAVOVACÍCH LÍŠT

Potiahnite oba konce nastavovacej lišty nahor.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com