

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4551BAR-01

Flyttbar positioneringsstav





Tillverkad i USA av

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com

Exact® är ett registrerat varumärke som tillhör Varian Medical Systems.

INNEHÅLL

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
ALLVARLIGA INCIDENTER.....	4
PATIENTMÅLGRUPPER.....	4
AVSEDDA ANVÄNDARE.....	4
VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR.....	4
BRUKSANVISNING	5
IORDNINGSSTÄLLNING	5
BORTTAGNING	7

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDEN

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTNA. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA ANORDNING BLIR KATASTROFALT BELASTAD, VERKAR SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

! VARNING ! DEN SKJUTBARA POSITIONERINGSSTAVEN GÖR ATT ENHETER KAN INSTALLERAS I SIDOFÖRSKJUTET LÄGE. DENNA FÖRSKJUTNINGSPosition SKA TAS MED I BERÄKNINGEN UNDER PLANERING OCH BEHANDLING. KONTROLLERA ATT DE RÖDA STIFTEN ÄR HELT LÅSTA INNAN DU INSTALLERAR EN ENHET PÅ DEN SKJUTBARA POSITIONERINGSSTAVEN.

ALLVARLIGA INCIDENTER

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får strålbehandling eller diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad enligt regionens myndighetskrav.

VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.



BRUKSANVISNING

IORDNINGSSTÄLLNING

MONTERING AV POSITIONERINGSSTAV

Den flyttbara positioneringsstaven har två positioneringsstift som passar till de flesta positioneringstillbehör av standardtyp. För att fästa den flyttbara positioneringsstaven, placera dess båda ändar i tillämpliga Varian Exact®-kompatibla referenshål och snäpp fast staven.

Närbild på positioneringsmarkeringen

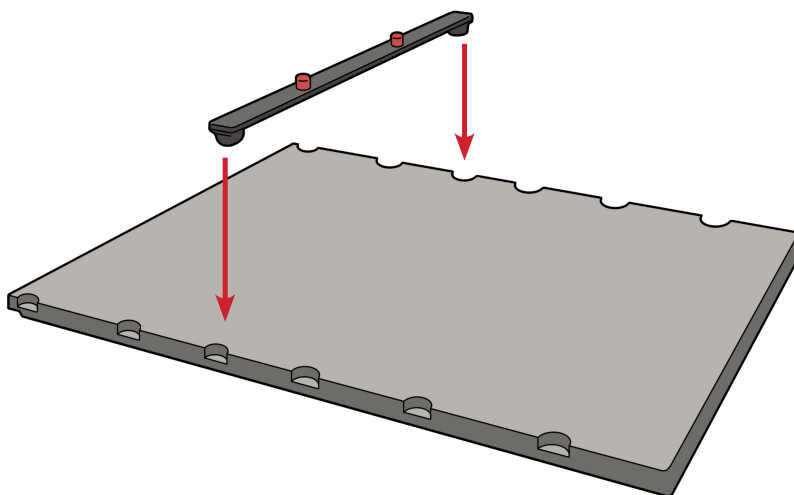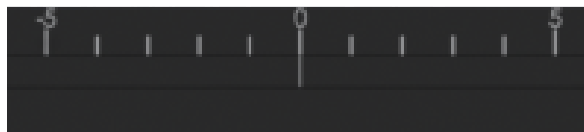

BRUKSANVISNING

IORDNINGSTÄLLNING

MONTERING AV POSITIONERINGSSTAV

1. Lossa de röda stiften genom att vrida dem moturs (Fig. 1).
2. Skjut stiften till önskat läge (Fig. 2 och Fig. 3).
3. Lås stiften genom att vrida medurs (Fig. 4).

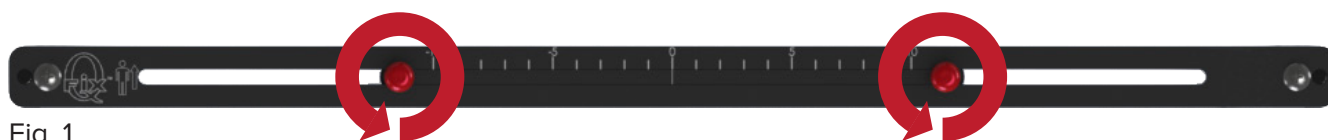


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

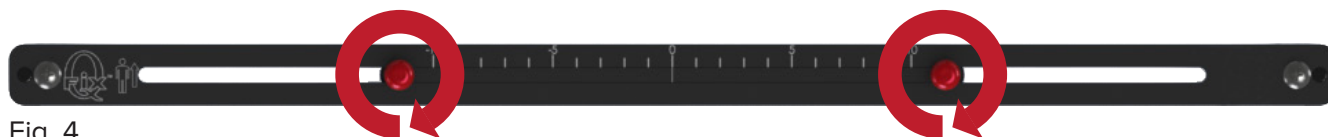


Fig. 4

BRUKSANVISNING

BORTTAGNING

BORTTAGNING AV POSITIONERINGSSTAV

Dra uppåt i vardera änden på positioneringsstaven.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2003916_SV_A
2023-04