

产品说明和用户手册

RT-4551BAR-01

滑动定位杆





美国制造，制造商为
科辅适 Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, 美国

+1 610-268-0585 www.Qfix.com

产品名称：人体定位袋

医疗器械备案号：20150038

Exact® 是 Varian Medical Systems 的注册商标。

目录

一般注意事项.....	4
警告声明.....	4
严重事件.....	4
患者目标人群	4
预期用	4
警告标签及说明.....	4
操作说明.....	5
设置	5
拆卸.....	7

一般注意事项

警告声明

！警告！不得修改本设备。如本装置的任何部分承受过大载荷、出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用并通过 +1 484-720-6054 或 TECHSUPPORT@QFIX.COM 联系 QFIX。

！警告！借助滑动定位杆可将装置安装在偏置侧位。在计划和治疗期间应考虑到此偏移位置。在将装置安装到滑动定位杆上之前，应确保红色销钉完全锁定。

严重事件

请向 Qfix 和您所在国家/地区的主管当局报告任何严重事件（例如导致或可能造成死亡或严重伤害的事件）。

患者目标人群

接受放射治疗或诊断成像程序的患者。

预期用户

产品的预期用户是根据监管区域的要求取得资质的人员。

警告标签及说明

有关符号及其定义的列表，请参阅 Qfix.com。



操作说明

设置

安装定位杆

滑动定位杆上有两个与大多数标准定位配件相匹配的定位销钉。要连接滑动定位杆, 请将其两端置于相应的 Varian Exact® 兼容变位凹槽内, 并发出咔哒声就位。

接近定位标记

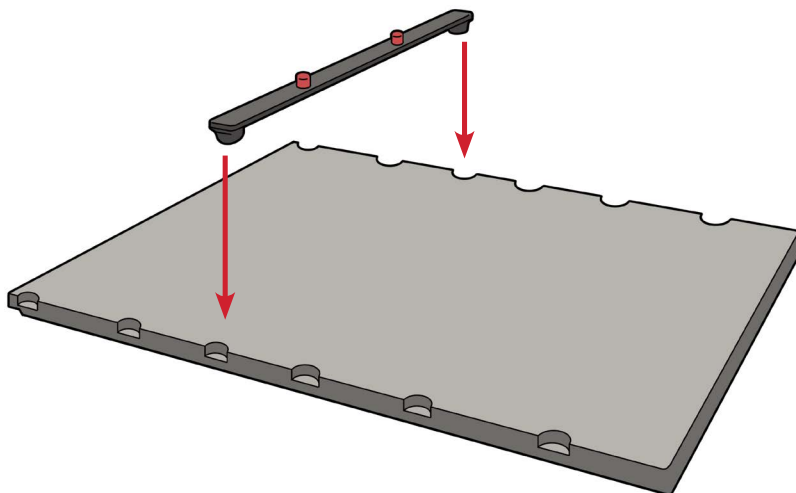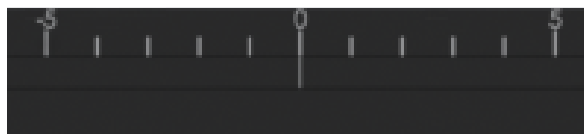

操作说明

设置

安装定位杆

1. 通过逆时针扭转松开红色销钉 (图 1)。
2. 将销钉滑动到所需位置 (图 2 和 3)。
3. 通过顺时针扭转锁定销钉 (图 4)。



图 1



图 2



图 3



图 4

操作说明

拆卸

拆卸定位杆

拉起定位杆的两端。



440 Church Road
Avondale, PA 19311 美国
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com