

ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Silverman бас сүйеніштері

RT-4491R2, 6 бұйымнан
тұратын жинақ, A-F

RT-4491R2-A, A өлшемі

RT-4491R2-B, B өлшемі

RT-4491R2-C, C өлшемі

RT-4491R2-D, D өлшемі

RT-4491R2-E, E өлшемі

RT-4491R2-F, F өлшемі

RT-4491-Q1, Silverman Q1

RT-4491-Q2, Silverman Q2

RT-4491-Q3-2G, Silverman Q3

RT-4491-Q4-2G, Silverman Q4

RT-4491R-M, Silverman «M»



ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ


! ЕСКЕРТУ ! ЕГЕР ОСЫ ӨНІМНІҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛІГІНЕ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖҮК ТҮССЕ, ОЛ ЗАҚЫМДАЛСА НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРМАСА, ОНЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ДЕРЕУ ТОҚТАТЫҢЫЗ.

! ЕСКЕРТУ ! SILVERMAN БАС СҮЙЕНІШІНІҢ ПІШІНІ ӨРТҮРЛІ БОЛУЫ МҮМКІН. ЕМДЕЛУШІГЕ БҮКІЛ ЕМДЕУ КУРСЫ БАРЫСЫНДА СИМУЛЯЦИЯДА ҚОЛДАНЫЛҒАНМЕН БІРДЕЙ SILVERMAN БАС СҮЙЕНІШІ ҚОЛДАНЫЛУЫ КЕРЕК.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

БАПТАУ

1. Емделушіге жайлы және бастың қажет қалыпта орналасуын қамтамасыз ететін Silverman бас сүйенішін таңдаңыз.
2. Бас тіректерін ұстап тұруға арналған құрылғыдағы істіктерге тесіктерді қою арқылы Silverman бас сүйенішін бекітіңіз (1-сурет).
3. Емделуші Silverman сүйенішіне дұрыс орналасқаннан кейін, тиісті пайдалану нұсқауларын орындай отырып Moldcare® және термопластикалық масканы қалыптауды бастаңыз.

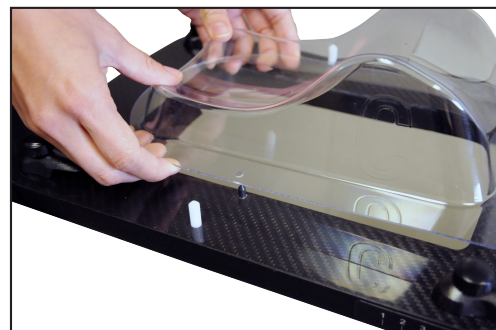

1-сурет

ШЫҒАРЫП АЛУ

Silverman бас сүйенішін алу үшін құрылғыдағы түйреуіштерден сүйенішті көтеріңіз (2-сурет).



2-сурет

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ТАЗАЛАУ

! ЕСКЕРТПЕ ! Silverman бас сүйенішін әр емдеуден кейін тазалап, қайта пайдалануға болады.

Silverman бас сүйенішін жұмсақ, сызат түсірмейтін тазалау немесе зарарсыздандыру ерітіндісімен тазалауға болады. Тазалау үшін ерітіндіні таза шүберекке жағып, бетін сүртіңіз.

ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ

Төмендегі тазалау материалдарына сынақ жүргізіліп, Silverman бас сүйенішін тазалауға жарамды деп танылды. Тазалағыш ерітінді өндірушісі ұсынған арнайы нұсқауларды қараңыз.

- Су
- 10% Clorox® ағартқыш ерітіндісі
- Изопропил спирті
- Cidex® 2,4% белсендірілген диальдегид ерітіндісі
- Сабын мен су

Moldcare® – ALCARE CO, LTD компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Cidex® – Johnson & Johnson компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Clorox® – The Clorox Company компаниясының тіркелген сауда белгісі.

2004210_KK_A
2023-07

ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ – 2004210_IFU, Silverman_KK

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | ☎ +1 610-268-0585 | 📠 +1 610-268-0588 | www.Qfix.com