

PRODUKTVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL

RT-4543C og RT-4546C

ArmShuttle[™] og ArmShuttle[™] Elite





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fremstillet i USA af Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Armshuttle, Quest og Access er varemærker der tilhører Qfix.

Clorox® er et registreret varemærke, der tilhører Clorox Company.

Cidex® er et registreret varemærke, der tilhører Johnson & Johnson.

INDHOLDSFORTEGNELSE

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER	4
ADVARSLER	4
ALVORLIGE HÆNDELSER	4
ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER.....	4
TILSIGTET ANVENDELSE	5
BETJENINGSVEJLEDNING	6
VEDLIGEHOLDELSE	7
RENGØRING AF SYSTEMET	7
DESINFICERING AF SYSTEMET	7
RESERVEDELSLISTE	8
OPSÆTNINGSARK.....	9
RT-4543C OG RT-4546C ARMSHUTTLE™ OG ARMSHUTTLE™ ELITE	9

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER

ADVARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSKYR. HVIS EN DEL AF UDSKYRET KOMMER UD FOR EN MEGET STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT VÆRE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSKYRET OMGÅENDE INDSTILLES OG QFIX KONTAKTES PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! ADVARSEL ! PATIENTEN MÅ IKKE TILPASSE POSITIONEN MED ARMSHUTTLE-GREBENE.

! ADVARSEL ! BRUG IKKE ARMSHUTTLE TIL AT TILPASSE PATIENTOVERFLADENS VINKEL.

ALVORLIGE HÆNDELSER

Rapportér alle alvorlige hændelser (f.eks. hændelser, der resulterer i eller har potentiale til at resultere i død eller alvorlig personskade) til både Qfix og den kompetente myndighed i dit land.

ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER

Få en liste over symboler med definitioner på Qfix.com.

TILSIGTET ANVENDELSE

Denne enhed er beregnet til at immobilisere, placere og flytte patienter, der får strålebehandling.

! BEMÆRK ! Ifølge amerikansk lov må dette produkt kun sælges af eller på en læges anvisning.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter, der gennemgår strålebehandling eller diagnostiske billeddannelsesprocedurer.

TILSIGTEDE BRUGERE

Den tilsigtede bruger til dette produkt er en person, som er kvalificeret i henhold til de lovgivningsmæssige krav i den respektive region.


BETJENINGSVEJLEDNING



1



2

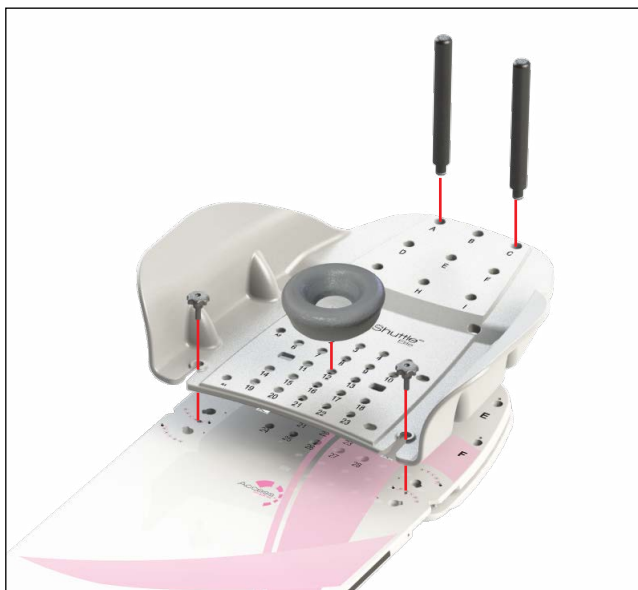

1



2

VEDLIGEHOELSE

RENGØRING AF SYSTEMET

Enheden kan rengøres med et mildt, ikke-slibende rengørings- eller desinfektionsmiddel. Rengør udstyret ved at påføre midlet på en ren klud og tørre overfladen af. Inspicer udstyret. Hvis det ikke er rent, skal de tidligere rengøringstrin gentages, indtil udstyret er synligt rent. Anvend en ren klud, som er fugtet med vand, til at aftørre udstyret for at fjerne alle rester efter rengøringsmidler. Aftør udstyret med en ren, tør klud for at tørre det. Følgende rengøringsmaterialer er blevet testet og fundet at være egnede til rengøring af anordningen.

- Vand
- Sæbe og vand


DESINFICERING AF SYSTEMET

Se de specifikke anvisninger fra producenten af rengøringsmidlet vedrørende desinfektion af enhedens overflade.

- 10 % Clorox® blegemiddel
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiveret dialdehydmiddel


RESERVEDELSLISTE

RT-4546C

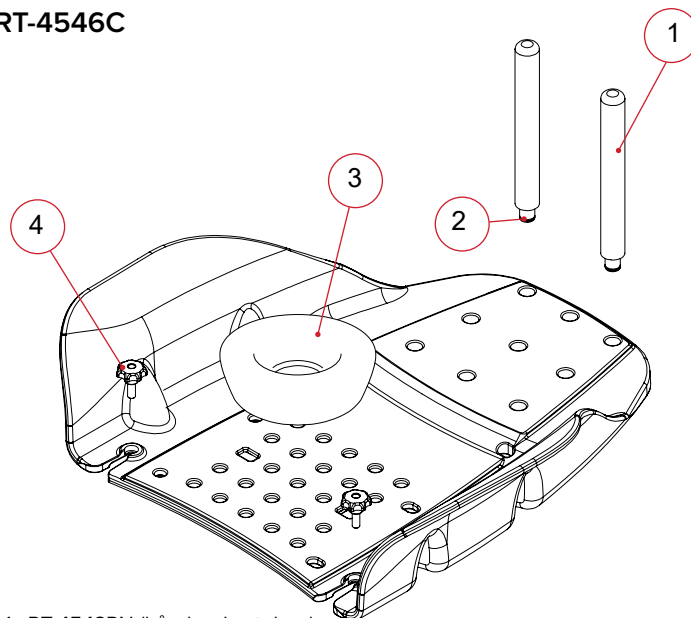

1. RT-4543PN (håndgrebsstolpe)
2. 3001419 (O-ring)
3. RT-4546H (hovedstøtte af skum)
4. 2004451 (gevindskåret greb)

RT-4543C

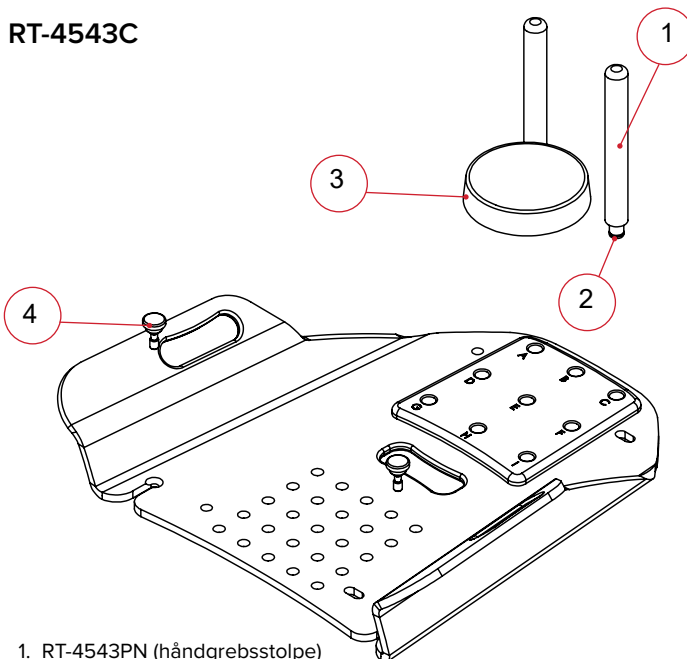

1. RT-4543PN (håndgrebsstolpe)
2. 3001419 (O-ring)
3. 2000109 (hovedstøtte af skum)
4. 2001643 (greb)

OPSÆTNINGSARK

RT-4543C OG RT-4546C ARMSHUTTLE™ OG ARMSHUTTLE™ ELITE

Patientens navn:



Patient-ID nr.:

Opsat af:

Læge:

Dato:

Kommentarer:

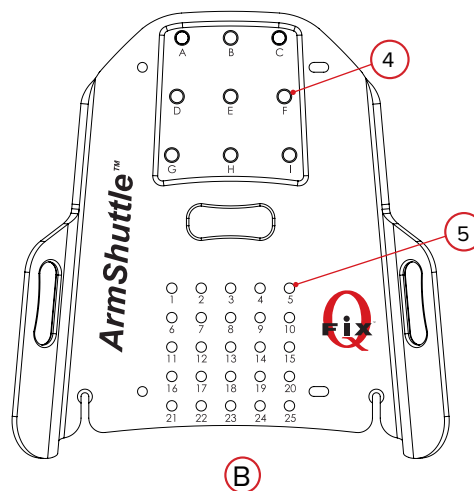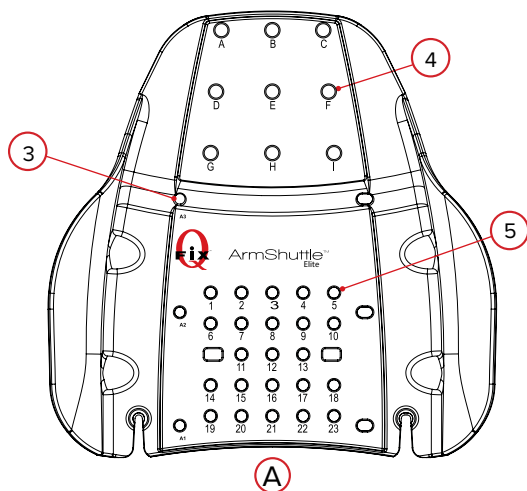

1. Anvendt ArmShuttle (vælg én): ArmShuttle Elite med Access™-rygleje ArmShuttle med QUEST™-brystplade
Anden enhed:

2. Placering af lokaliseringsstang/-stænger på enheden (hvis relevant):

3. Placering af lokaliseringsstang/-stænger (vælg anvendte) (kun for ArmShuttle Elite):

A1 A2 A3 INGEN ANVENDT

4. Placering af håndgreb (vælg anvendte):

A B C D E F G H I INGEN ANVENDTE

5. Placering af hovedstøtte (numrene 1–25)

Anvendt type hovedstøtte:

Kommentarer:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004227_DA_E
2021-07