



positioning
patients for life.®

TUOTEOHJE JA KÄYTTÖOPAS

RT-4543C ja RT-4546C

ArmShuttle™ ja ArmShuttle™ Elite





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Valmistaja USA:ssa Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	---	--

Armshuttle, Quest ja Access ovat Qfixin tavaramerkkejä.

Clorox® on The Clorox Companyn rekisteröity tavaramerkki.

Cidex® on Johnson & Johnsonin rekisteröity tavaramerkki.

SISÄLTÖ

YLEISET VAROTOIMET	4
VAROITUSLAUSEKKEET	4
VAKAVAT HAITTATAPAHTUMAT	4
VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET	4
KÄYTTÖTARKOITUS	5
KÄYTTÖOHJEET	6
YLLÄPITO	7
JÄRJESTELMÄN PUHDISTAMINEN	7
JÄRJESTELMÄN DESINFIOIMINEN	7
OSALUETTELO	8
POTILASASENNUSKAAVIO	9
RT-4543C JA RT-4546C ARMSHUTTLE™ JA ARMSHUTTLE™ ELITE	9

YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSLAUSEKKEET

! VAROITUS ! TÄTÄ LAITTEISTOA EI SAA MUUNTA A MILLÄÄN TAVALLA. JOS TÄMÄN LAITTEEN MITÄÄN OSAA KUORMITETAAN LIIKAA, SE NÄYTTÄÄ VAURIOITUNEELTA TAI TOIMII VIRHEELLISESTI, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYTTÄ QFIXIIN, PUH. +1 484-720-6054 TAI SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! VAROITUS ! POTILAS EI SAA SÄÄTÄÄ ASENTOA ARMSHUTTLE-KAHVOJEN AVULLA.

! VAROITUS ! POTILASALUSTAN KULMAA EI SAA SÄÄTÄÄ ARMSHUTTLEN AVULLA.

VAKAVAT HAITTATA PAHTUMAT

Ilmoita kaikista vakavista haittatapahtumista (esim. tapahtumat, joista seuraa tai voi seurata kuolema tai vakava vamma) sekä Qfixille että oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET

Symboliluettelo ja symbolien määritelmät ovat osoitteessa Qfix.com.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä laite on tarkoitettu sädehoitoa saavien potilaiden immobilisointiin, asemointiin ja uudelleenasetointiin.

! HUOMAUTUS ! Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksellä.

POTILASKOHDERYHMÄT

Potilaat, jotka saavat sädehoitoa tai joille tehdään diagnostisia kuvantamistoimenpiteitä.

TARKOITETUT KÄYTTÄJÄT

Tuotteiden tarkoitettu käyttäjä on henkilö, jolla on kyseisellä lainkäyttöalueella edellytetty pätevyys.


KÄYTTÖOHJEET



1



2

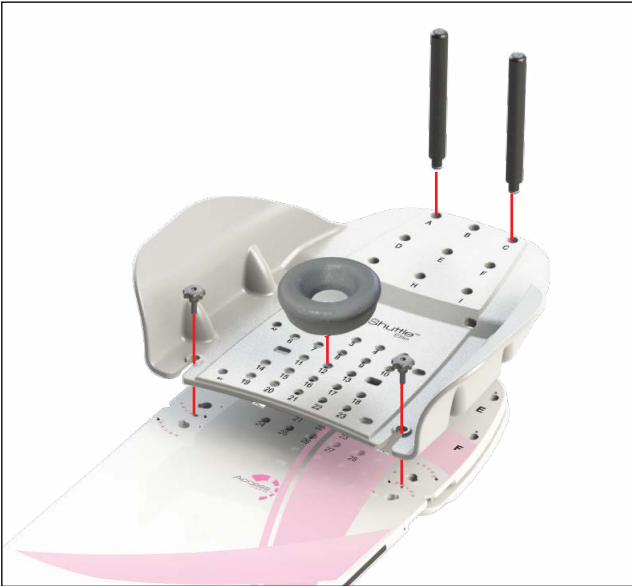

1



2

YLLÄPITO

JÄRJESTELMÄN PUHDISTAMINEN

Laite voidaan puhdistaa miedolla, hankaamattomalla pesu- tai desinfiointiliuoksella. Puhdista kostuttamalla puhdas liina liuokseen ja pyyhkimällä pinta. Tarkasta laite silmämääräisesti, ja jos se ei ole puhdas, toista edellä olevat vaiheet, kunnes laite on silmämääräisesti puhdas. Pyyhi mahdolliset pesuainejäämät laitteen pinnalta puhtaalla, veteen kostutetulla liinalla. Kuivaa laite pyyhkimällä se puhtaalla, kuivalla liinalla. Seuraava pesuaine on testattu ja sen on todettu soveltuvan laitteen puhdistamiseen.

- Vesi
- Saippua ja vesi


JÄRJESTELMÄN DESINFIOIMINEN

Laitteen pinnan desinfioinnissa on noudatettava pesuaineen valmistajan erityisohjeita.

- 10 % Clorox®-valkaisuaineliuos
- Isopropyylialkoholi
- Cidex® 2,4 % aktivoitu dialdehydiliuos


OSALUETTELO

RT-4546C

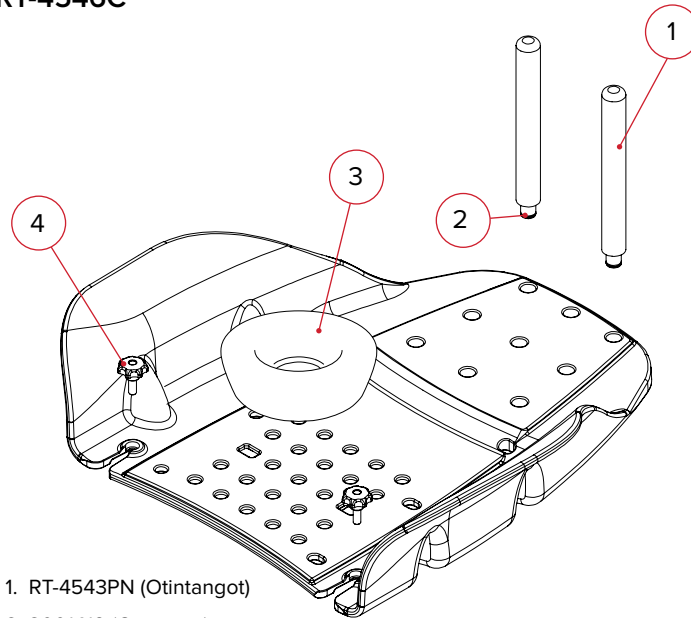

1. RT-4543PN (Otintangot)
2. 3001419 (O-rengas)
3. RT-4546H (Vaahtomuovinen päätuki)
4. 2004451 (Kierteitetty nuppi)

RT-4543C

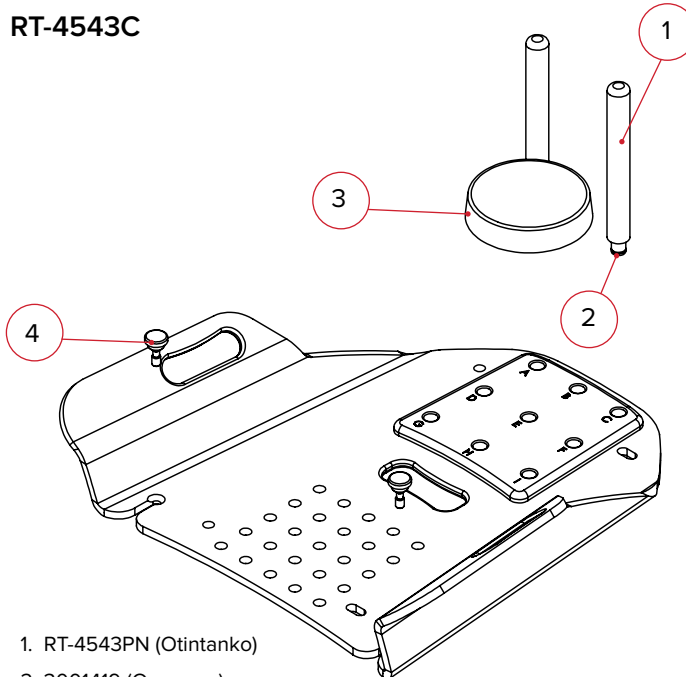

1. RT-4543PN (Otintanko)
2. 3001419 (O-rengas)
3. 2000109 (Vaahtomuovinen päätuki)
4. 2001643 (Nuppi)

POTILASASENNUSKAAVIO

RT-4543C JA RT-4546C ARMSHUTTLE™ JA ARMSHUTTLE™ ELITE

Potilaan nimi:



Potilastunniste:

Asentaja:

Lääkäri:

Pvm:

Muistiinpanot:

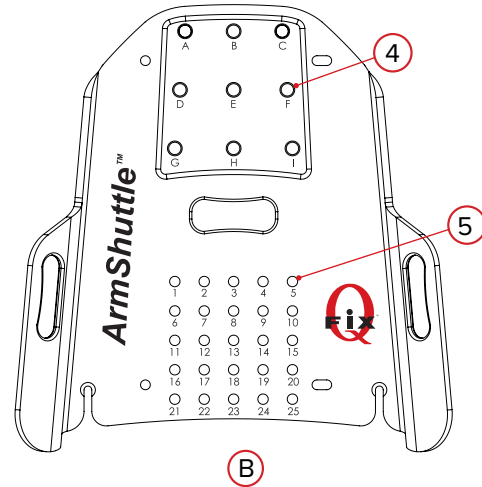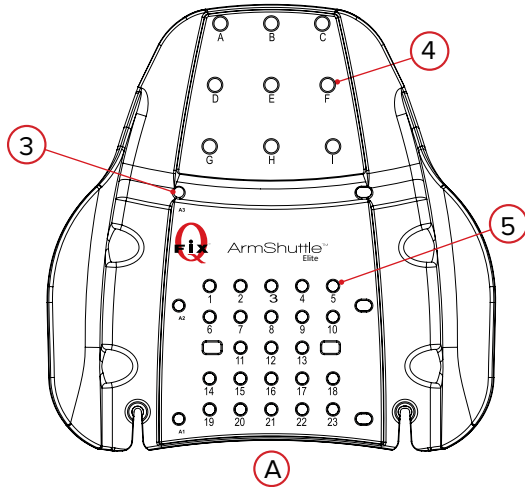

1. Käytetty ArmShuttle-tuki (valitse yksi): ArmShuttle Elite ja Access™ Supine ArmShuttle ja QUEST™-rintalevy
Muu laite:

2. Laitteen paikannintankojen sijainti (tarvittaessa):

3. Paikannintankojen sijainti (valitse käytettävät): **A1** **A2** **A3** **EI KÄYTETTY**

4. Käsitukien sijainti (valitse käytettävät): **A** **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **EI KÄYTETTY**

5. Päätuen sijainti (numero 1–25): Käytetyn päätuen tyyppi:

Muistiinpanot:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004227_FI_F
2021-07