

VODIČ I UPUTE ZA UPORABU PROIZVODA

RT-4543C i RT-4546C

ArmShuttle[™] i ArmShuttle[™] Elite





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Proizvelo u SAD-u društvo Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	---	--	---

Armshuttle, Quest i Access zaštitni su znakovi društva Qfix.

Clorox® je registrirani zaštitni znak društva The Clorox Company.

Cidex® je registrirani zaštitni znak društva Johnson & Johnson.

SADRŽAJ

OPĆE MJERE OPREZA	4
UPOZORENJA.....	4
OZBILJAN ŠTETNI DOGAĐAJI	4
OZNAKE I OPISI UPOZORENJA.....	4
NAMJENA.....	5
UPUTE ZA UPORABU	6
ODRŽAVANJE	7
ČIŠĆENJE SUSTAVA	7
DEZINFEKCIJA SUSTAVA.....	7
POPIS DIJELOVA.....	8
POPIS NAMJEŠTENIH POSTAVKI.....	9
RT-4543C I RT-4546C ARMSHUTTLE™ I ARMSHUTTLE™ ELITE	9

OPĆE MJERE OPREZA

UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NISU DOPUŠTENE IZMJENE OVE OPREME. AKO BILO KOJI DIO OVOG UREĐAJA BUDE IZLOŽEN OPTEREĆENJU U SLUČAJU KATASTROFE, DOIMA SE OŠTEĆENIM ILI NEPRAVILNO RADI, SMJESTA GA PRESTANITE UPOTREBLJAVATI I KONTAKTIRAJTE S DRUŠTVOM QFIX NA BR. TEL. +1 484-720-6054 ILI POŠALJITE PORUKU E-POŠTE NA ADRESU TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! UPOZORENJE ! NE DOZVOLITE PACIJENTU DA PRILAGODI POLOŽAJ KORIŠTENJEM RUČKI PROIZVODA ARMSHUTTLE.

! UPOZORENJE ! NE UPOTREBLJAVAJTE ARMSHUTTLE ZA PRILAGOĐAVANJE KUTA POVRŠINE ZA PACIJENTA.

OZBILJAN ŠTETNI DOGAĐAJI

Sve štetne događaje (npr. štetne događaje koji dovode do ili mogu dovesti do smrti ili teške ozljede) prijavite tvrtki Qfix i nadležnom tijelu u vašoj zemlji.

OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Popis simbola i njihovih definicija potražite na web-mjestu Qfix.com.

NAMJENA

Ovaj je uređaj namijenjen za imobilizaciju, namještanje i ponovno namještanje pacijenata podvrgnutih radioterapiji.

! NAPOMENA ! Savezni zakon SAD-a ograničava prodaju ovog uređaja po narudžbi liječnika ili od strane samog liječnika.

CILJANA SKUPINA PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju radijacijskoj terapiji ili postupcima dijagnostičkog snimanja.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda osoba je kvalificirana u skladu sa zahtjevima regulatornog područja.


UPUTE ZA UPORABU



1



2

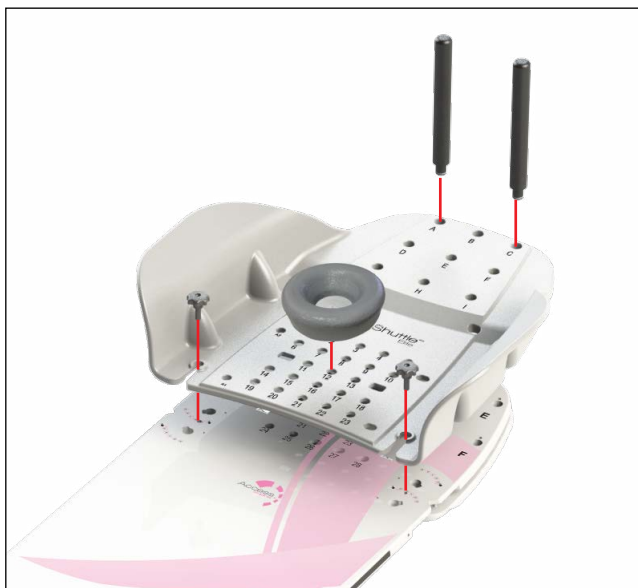

1



2

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SUSTAVA

Uređaj se može očistiti blagom, neabrazivnom otopinom za čišćenje ili dezinfekciju. Da biste očistili površinu, nanosite otopinu na čistu krpu i obrišite površinu. Pregledajte uređaj te, ako nije čist, ponovite prethodno navedene korake čišćenja sve dok nije moguće vizualno potvrditi da je čist. Čistom krpom navlaženom vodom obrišite uređaj kako biste uklonili sve ostatke sredstva za čišćenje. Za sušenje uređaj obrišite čistom, suhom krpom. Sljedeće je sredstvo za čišćenje podvrgnuto ispitivanju te je utvrđeno da se može upotrebljavati za čišćenje uređaja.

- Voda
- Sapun i voda


DEZINFEKCIJA SUSTAVA

Da biste dezinficirali površinu uređaja, potražite posebne upute proizvođača sredstva za čišćenje.

- 10 %-tna otopina izbjeljivača Clorox®
- Izopropilni alkohol
- 2,4 %-tna otopina aktiviranog dialdehida Cidex®


POPIS DIJELOVA

RT-4546C

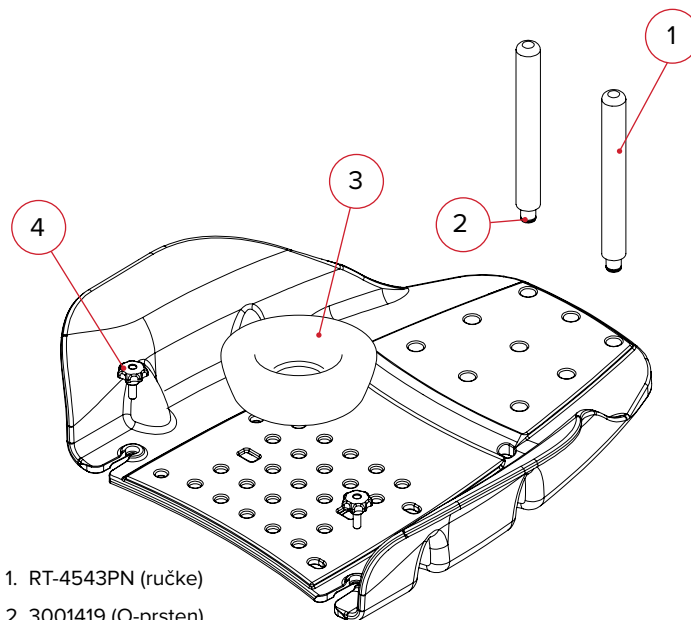

1. RT-4543PN (ručke)
2. 3001419 (O-prsten)
3. RT-4546H (pjenasti naslon za glavu)
4. 2004451 (ručica s navojem)

RT-4543C

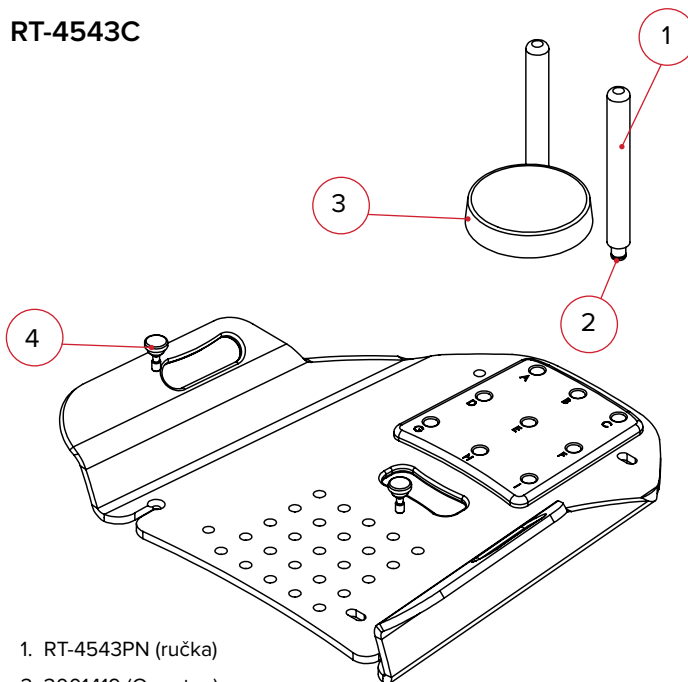

1. RT-4543PN (ručka)
2. 3001419 (O-prsten)
3. 2000109 (pjenasti naslon za glavu)
4. 2001643 (ručica)

POPIŠ NAMJEŠTENIH POSTAVKI

RT-4543C I RT-4546C ARMSHUTTLE™ I ARMSHUTTLE™ ELITE

Ime pacijenta:



Identifikacijski broj pacijenta:

Liječnik:

Komentari:

Postavke namjestio/la:

Datum:

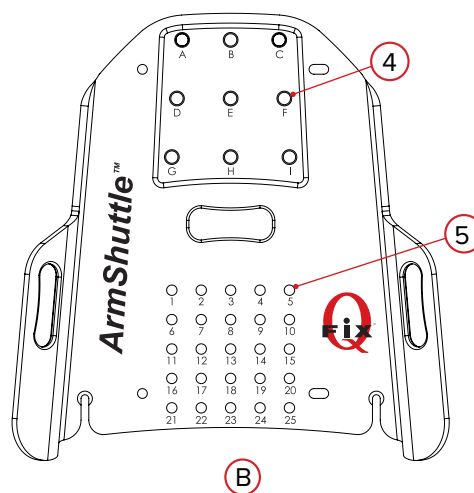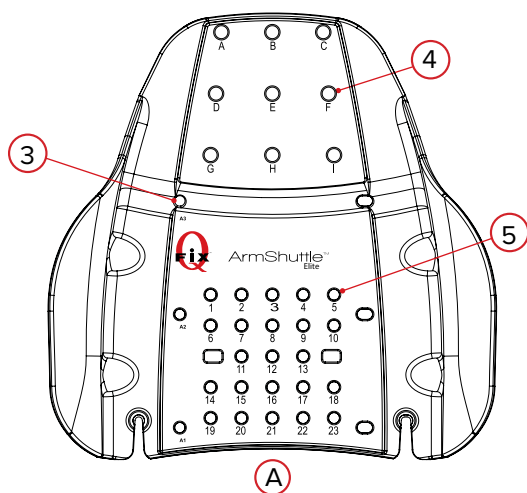

- Korišteni ArmShuttle (odaberite jedno): ArmShuttle Elite s uređajem Access™ Supine
ArmShuttle s uređajem QUEST™ Breastboard Drugi uređaj:
- Položaj prečke/i za određivanje položaja na uređaju (ako ih ima):
- Položaj prečke/i za određivanje položaja na uređaju (odaberite što se koristi) (samo za ArmShuttle Elite):
A1 A2 A3 NE KORISTI/E SE
- Položaj ručke/i (odaberite što se koristi): **A B C D E F G H I NE KORISTI/E SE**
- Položaj naslona za glavu (broj 1–25): Tip korištenog naslona za glavu:

Napomene:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com

2004227_HR_F
2021-07