



positioning
patients for life.®

製品ガイド および取扱説明書

RT-4543C および RT-4546C
ArmShuttle™ および ArmShuttle™ Elite





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 米国での製造者名 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Armshuttle, Quest および Access は、Qfix社の商標です。

Clorox® はThe Clorox Company社の登録商標です。

Cidex® は Johnson & Johnson社の登録商標です。

目次

一般的な使用上の注意.....	4
警告事項.....	4
重大な有害事象.....	4
警告ラベルおよび説明.....	4
用途.....	5
操作方法.....	6
メンテナンス.....	7
システムのクリーニング.....	7
システムの消毒.....	7
部品リスト.....	8
セットアップシート.....	9
RT-4543C & RT-4546C ARMSHUTTLE™ & ARMSHUTTLE™ ELITE.....	9

一般的な使用上の注意

警告事項

!警告! 本装置を改造することはできません。本デバイスの一部が大きな荷重を受けた場合、損傷しているように見える場合、または正常に機能しない場合は、直ちに使用を中止して、QFIX社 (+1 484-720-6054 または TECHSUPPORT@QFIX.COM) まで連絡してください。

!警告! 患者が ARMSHUTTLE のハンドルを使用して位置を調整しないようにしてください。

!警告! ARMSHUTTLE を使用して、患者が接している表面の角度を調整しないでください。

重大な有害事象

重大な有害事象 (例えば、死亡または重傷をもたらす、またはその可能性がある事象) があれば必ず、Qfix と、設置した国の所管官庁の両方に報告してください。

警告ラベルおよび説明

記号およびその定義に関する一覧表は、Qfix.com をご覧ください。

用途

本デバイスは、放射線治療を受ける患者の固定、位置決め、および再位置決めを行うためのものです。

！注記！ 米国の連邦法により、本デバイスの販売または使用は、医師もしくは医師の指示に基づくものに制限されています。

対象患者

放射線療法または画像診断処置を受けている患者。

意図する使用者

製品の意図する使用者は、規制地域の要件に従って認定を受けた資格者です。


操作方法



1



2

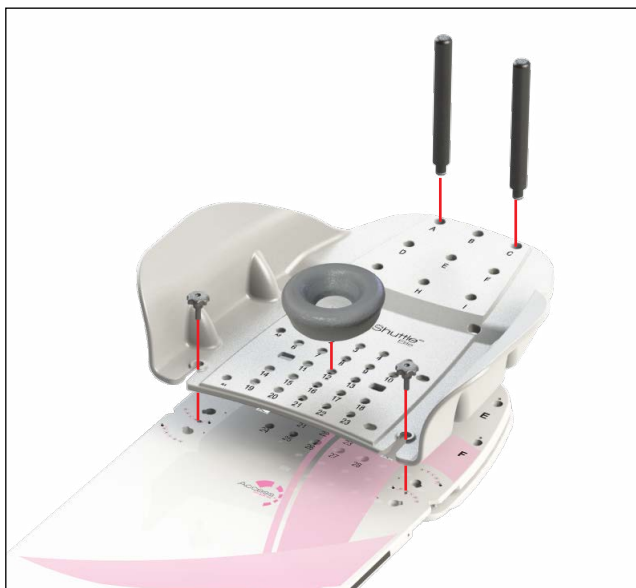

1



2

メンテナンス

システムのクリーニング

本デバイスは、刺激が少なく、研磨剤の入っていない洗浄液や消毒液で清拭してください。クリーニングする際は、溶液を浸した清潔な布で表面を拭きます。デバイスを目視点検し、汚れている場合は、きれいになるまで上記のクリーニング手順を繰り返します。水で湿らせた清潔な布でデバイスを拭き、残った洗浄剤を取り除きます。乾かすには、デバイスを清潔で乾いた布で拭きます。本デバイスのクリーニングには、以下の洗浄剤がテストの結果適切とされています。

- 水
- 石鹼および水


システムの消毒

デバイス表面を消毒する際は、洗浄剤メーカーからの具体的な指示に従ってしてください。

- 10% Clorox®ブリーチ液
- イソプロピルアルコール
- Cidex® 2.4%活性化ジアルデヒド液


部品リスト

RT-4546C

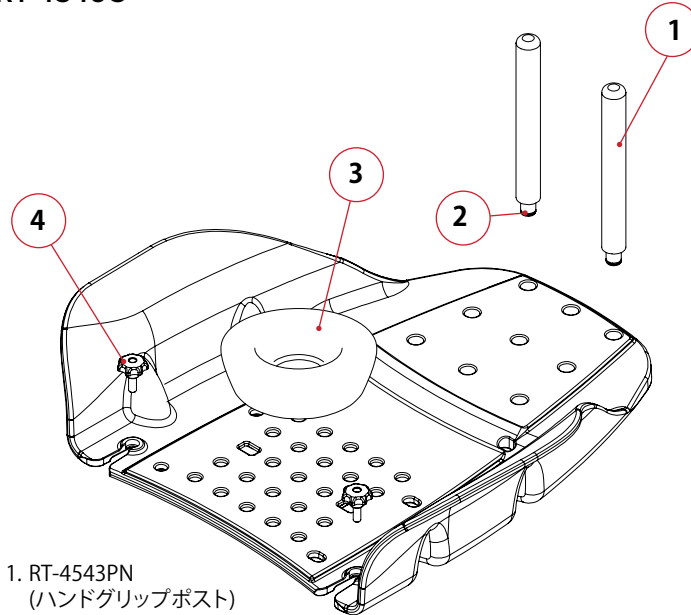

1. RT-4543PN
(ハンドグリップポスト)
2. 3001419 (Oリング)
3. RT-4546H (フォームヘッドレスト)
4. 2004451 (ねじ式ノブ)

RT-4543C

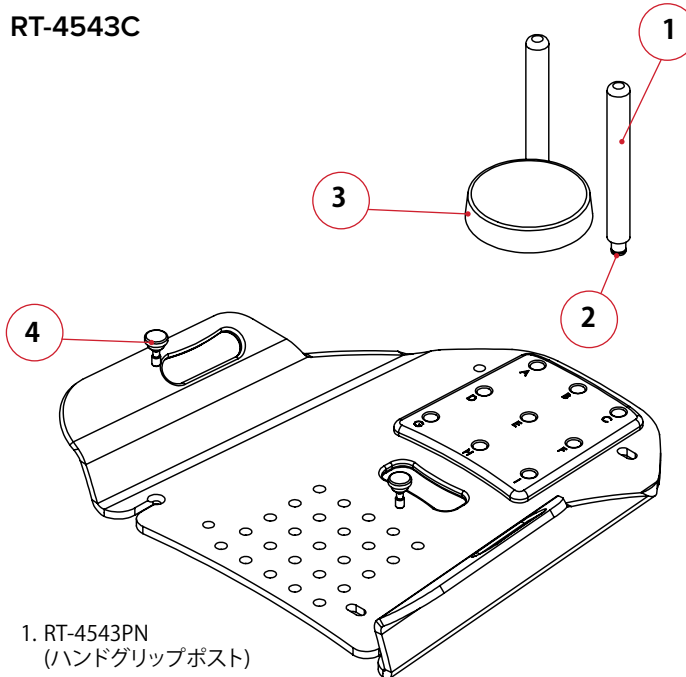

1. RT-4543PN
(ハンドグリップポスト)
2. 3001419 (Oリング)
3. 2000109 (フォームヘッドレスト)
4. 2001643 (ノブ)

セットアップシート

RT-4543C & RT-4546C ARMSHUTTLE™ & ARMSHUTTLE™ ELITE

患者名:



患者ID番号:

セットアップ担当者:

医師:

日付:

コメント:

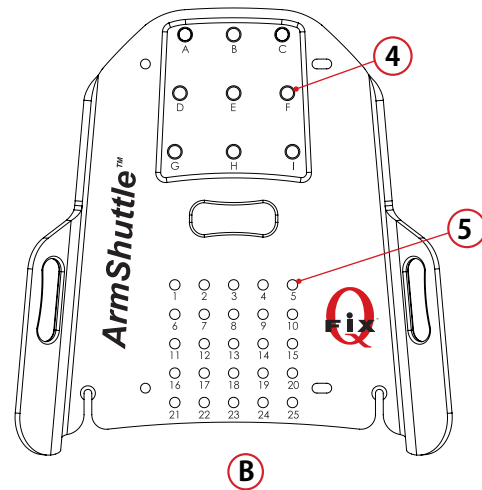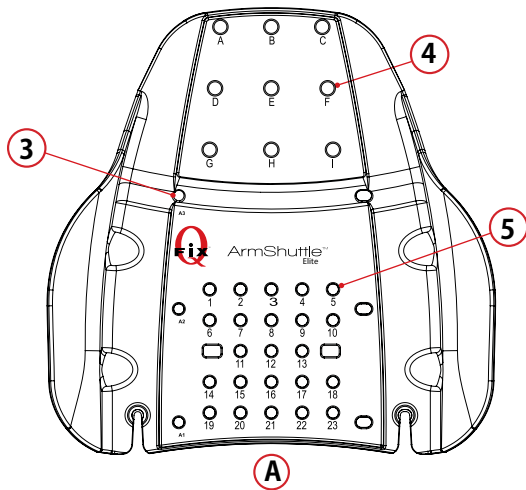

1. 使用するArmShuttle (いずれかを選択): ArmShuttle Elite、Access™スパイン付き ArmShuttle、QUEST™プレストボード付き
その他のデバイス:
2. 位置決めバーのデバイス上の位置 (該当する場合):
3. 位置決めバーの位置 (使用するものを選択) (ArmShuttle Eliteのみ): A1 A2 A3 使用しない
4. ハンドポストの位置 (使用するものを選択): A B C D E F G H I 使用しない
5. ヘッドレストの位置 (1~25番): 使用するヘッドレストの種類:

メモ:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004227_JA_E
2021-07