

ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

RT-4543C және RT-4546C

ArmShuttle™ және ArmShuttle™ Elite





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	АҚШ-та жасаған өндіруші Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	---	--

ArmShuttle, Quest және Access – Qfix компаниясының сауда белгілері.

Clorox® – The Clorox Company компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Cidex® – Johnson & Johnson компаниясының тіркелген сауда белгісі.

МАЗМҰНЫ

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ	4
ЕЛЕУЛІ ОҚЫС ОҚИҒАЛАР	4
ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ	4
ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ	5
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ	6
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	7
ЖҮЙЕНІ ТАЗАЛАУ	7
ЖҮЙЕНІ ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ	7
БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ	8
БАПТАУ ПАРАҒЫ	9
RT-4543C ЖӘНЕ RT-4546C ARMSHUTTLE™ ЖӘНЕ ARMSHUTTLE™ ELITE	9

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

! ЕСКЕРТУ ! БҰЛ ЖАБДЫҚҚА ЕШҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУГЕ БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛІГІНЕ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖҮК ТҮССЕ, ОЛ ЗАҚЫМДАЛСА НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРМАСА, ОНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНБАЙ, +1 484-720-6054 НӨМІРІ НЕМЕСЕ TECHSUPPORT@QFIX.COM МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША QFIX КОМПАНИЯСЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

! ЕСКЕРТУ ! ЕМДЕЛУШІГЕ ARMSHUTTLE ТҰТҚАЛАРЫНАН ҰСТАП ДЕНЕ ҚАЛПЫН РЕТТЕУІНЕ ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ.

! ЕСКЕРТУ ! ЕМДЕЛУШІМЕН ЖАНАСАТЫН БЕТТІҢ БҰРЫШЫН РЕТТЕУ ҮШІН ARMSHUTTLE ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

ЕЛЕУЛІ ОҚЫС ОҚИҒАЛАР

Елеулі оқыс оқиғалар (мысалы, өлімге немесе ауыр жарақаттарға әкеп соқтыратын немесе әкелуі мүмкін оқиғалар) туралы Qfix компаниясына да, еліңіздің құзыретті органына да хабарлаңыз.

ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Таңбалардың тізімі мен олардың анықтамаларын Qfix.com сайтынан қараңыз.

ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ

Бұл құрылғы сәулелік терапиядан өтіп жатқан емделушілерді қозғалтпай ұстауға, жайғастыруға және дене қалпын өзгертуге арналған.

! ЕСКЕРТПЕ ! АҚШ федералдық заңына сәйкес, бұл құрылғыны тек дәрігерге немесе оның тапсырысы бойынша сатуға рұқсат етіледі.

МАҚСАТТЫ ЕМДЕЛУШІ ТОПТАРЫ

Рентгенотерапия немесе диагностикалық визуализация процедураларынан өтіп жатқан емделушілер.


МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР

Өнімнің мақсатты пайдаланушысы – аймақтың нормативтік талаптарына сәйкес білікті тұлға.


ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ



1

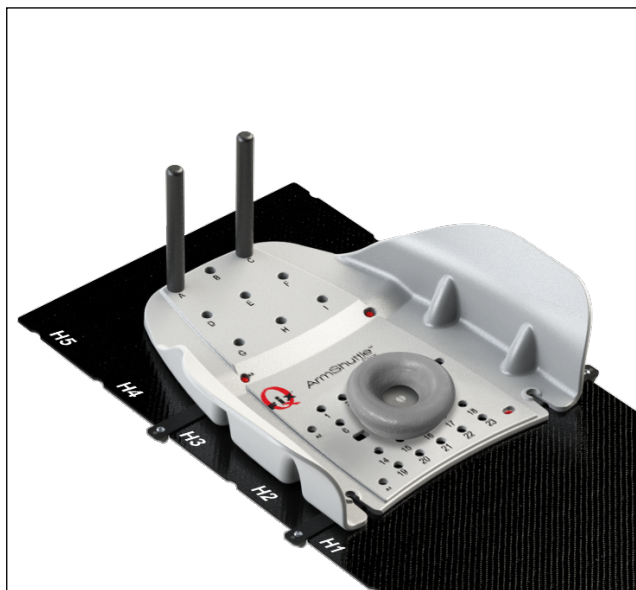

2

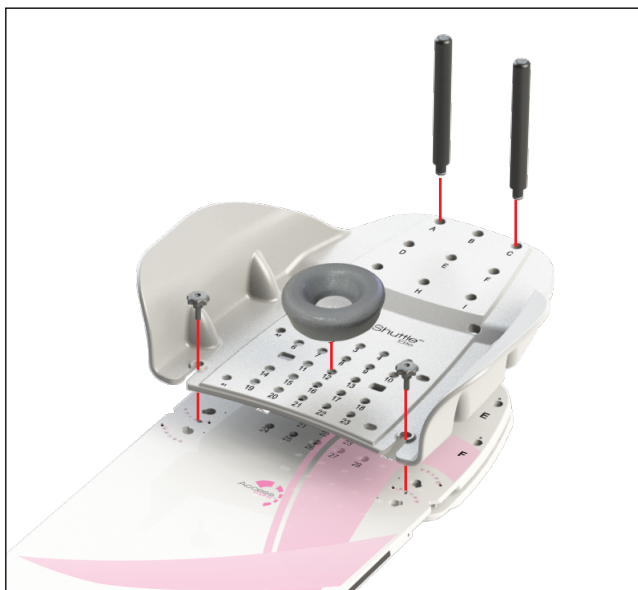

1



2

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ЖҮЙЕНІ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны жұмсақ, сызат түсірмейтін тазалау немесе зарарсыздандыру ерітіндісімен тазалау керек. Тазалау үшін ерітіндіні таза шүберекке жағып, бетін сүртіңіз. Құрылғыны сыртынан тексеріп, егер ол таза болмаса, алдыңғы тазалау қадамдарын таза болып көрінгенше қайталаңыз. Құрылғыдағы тазалағыш ерітінді қалдығын суға малынған таза шүберекпен сүртіп кетіріңіз. Құрғату үшін құрылғыны таза, құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Төмендегі тазалау материалына сынақ жүргізіліп, ол құрылғыны тазалауға жарамды деп танылды.

- Су
- Сабын мен су


ЖҮЙЕНІ ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ

Құрылғының бетін зарарсыздандыру үшін тазалағыш ерітінді өндірушісі ұсынған арнайы нұсқауларды қараңыз.

- 10% Clorox® ағартқыш ерітіндісі
- Изопропил спирті
- Cidex® 2,4% белсендірілген диальдегид ерітіндісі


БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ

RT-4546C

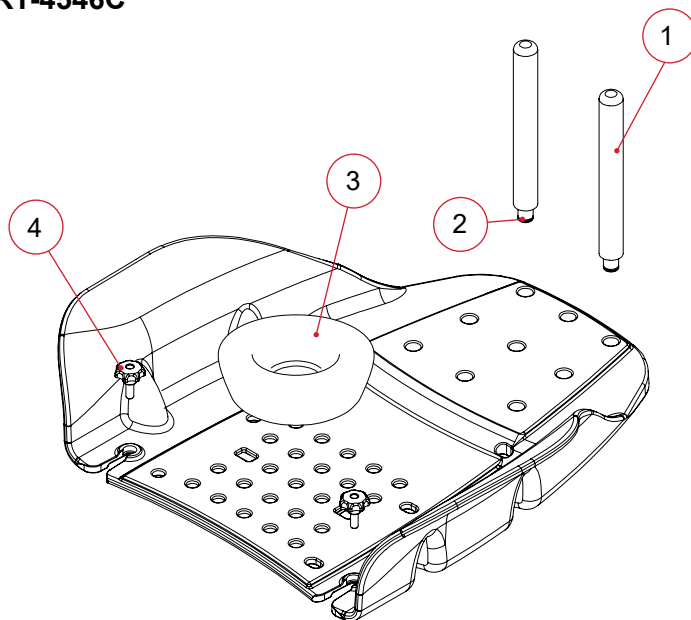

1. RT-4543PN (Қол тірегіші тұғырлары)
2. 3001419 (Тығыздағыш сақина)
3. RT-4546H (Көбік бас тіреуіші)
4. 2004451 (Ішкі бұрандалы жұлдызша тәрізді бас)

RT-4543C

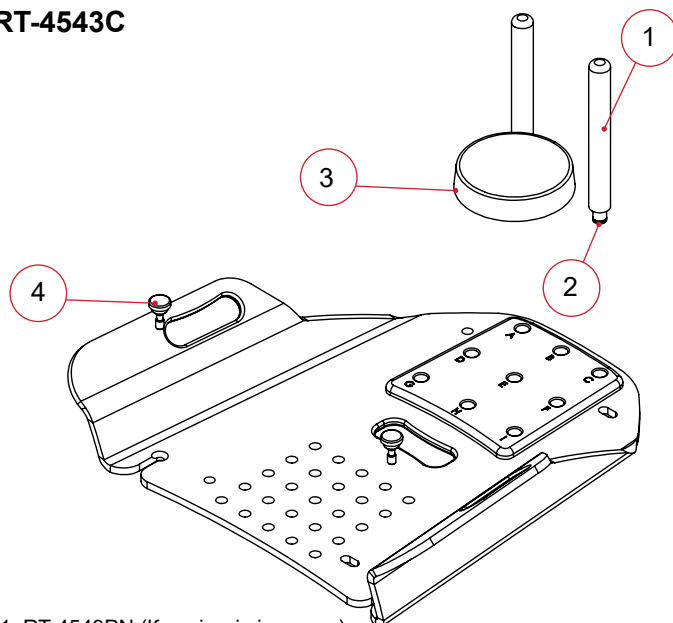

1. RT-4543PN (Қол тірегіші тұғыры)
2. 3001419 (Тығыздағыш сақина)
3. 2000109 (Көбік бас тіреуіші)
4. 2001643 (Тетік)

БАПТАУ ПАРАҒЫ

RT-4543C ЖӘНЕ RT-4546C ARMSHUTTLE™ ЖӘНЕ ARMSHUTTLE™ ELITE

Емделушінің аты-жөні:


Емделушінің идентификатор №:

Орнатушы:

Дәрігер:

Күні:

Түсініктемелер:

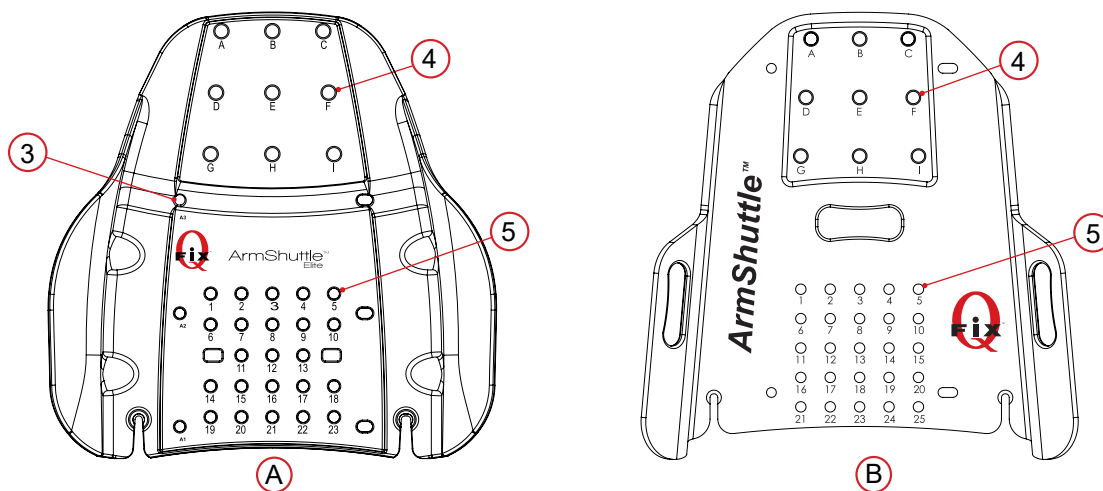

1. Пайдаланылатын ArmShuttle (біреуін таңдаңыз):

Access™ Supine бап ArmShuttle Elite

QUEST™ Breastboard бап ArmShuttle™

Басқа құрылғы:

2. Құрылғыдағы позициялық тақтайшаның (тақтайшалардың) орны (қолданылса):

3. Тақтайшаның (тақтайшалардың) орны (қолданылатынын таңдаңыз) (тек ArmShuttle Elite)

A1 A2 A3 ЕШБІРІ ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ

4. Қол тұғыр(лар)ының орны (қолданылатынын таңдаңыз)

A B C D E F G H I ЕШБІРІ ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ

5. Бас тіреуішінің орны (1-25 нөмір):

Пайдаланылған бас тіреуіші:

Ескертпелер:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004227_KK_A
2023-08