

GUIA DO PRODUTO E MANUAL DO USUÁRIO

RT-4543C e RT-4546C

ArmShuttle[™] e ArmShuttle[™] Elite





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fabricado nos EUA por Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Armshuttle, Quest and Access são marcas comerciais da Qfix.

Clorox® é uma marca registrada da The Clorox Company.

Cidex® é uma marca registrada da Johnson & Johnson.

Registro Anvisa No: 81300160002

SUMÁRIO

PRECAUÇÕES GERAIS	4
AVISOS DE CUIDADO	4
INCIDENTES GRAVES	4
ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE CUIDADO	4
USO PRETENDIDO	5
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	6
MANUTENÇÃO	7
LIMPEZA DO SISTEMA	7
DESINFECÇÃO DO SISTEMA	7
LISTA DE PEÇAS	8
FOLHA DE AJUSTES	9
RT-4543C E RT-4546C ARMSHUTTLE™ E ARMSHUTTLE™ ELITE	9

PRECAUÇÕES GERAIS

AVISOS DE CUIDADO

! AVISO ! NÃO É PERMITIDO FAZER NENHUMA MODIFICAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO. SE QUALQUER PEÇA DESTE DISPOSITIVO RECEBER UMA CARGA CATASTRÓFICA, APRESENTAR SINAIS DE DANOS OU ESTIVER FUNCIONANDO INADEQUADAMENTE, INTERROMPA O USO IMEDIATAMENTE E ENTRE EM CONTATO COM QFIX PELO TELEFONE +1 484-720-6054 OU PELO E-MAIL TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! AVISO ! NÃO PERMITA QUE O PACIENTE AJUSTE A POSIÇÃO UTILIZANDO AS ALÇAS DO ARMSHUTTLE.

! AVISO ! NÃO USE O ARMSHUTTLE PARA AJUSTAR O ÂNGULO DO PACIENTE NA SUPERFÍCIE.

INCIDENTES GRAVES

Reporte qualquer incidente grave (por exemplo, incidentes que resultem ou possam resultar em óbito ou lesões graves) à Qfix e à Autoridade Competente do seu país.

ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE CUIDADO

Consulte Qfix.com para ver uma lista de símbolos e suas definições.

USO PRETENDIDO

Este dispositivo se destina a imobilizar, posicionar e reposicionar os pacientes submetidos à radioterapia.

! OBSERVAÇÃO ! As leis federais dos EUA restringem a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem de um médico.

GRUPO ALVO DE PACIENTES

Pacientes que estejam realizando radioterapia ou procedimentos de diagnóstico por imagens.

USUÁRIO PRETENDIDO

O usuário pretendido para os produtos é uma pessoa qualificada de acordo com as exigências da região regulatória.


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



1



2

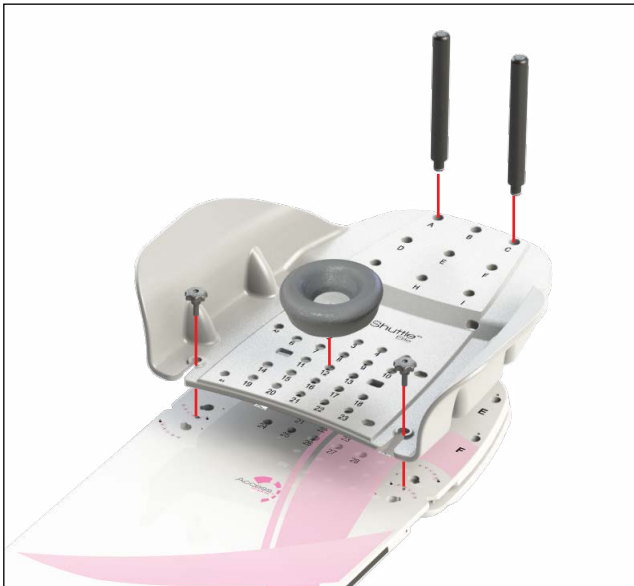

1



2

MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO SISTEMA

O dispositivo pode ser limpo com uma solução de limpeza suave, não abrasiva ou uma solução desinfetante. Para limpar, aplique a solução em um pano limpo e limpe a superfície. Inspeção o dispositivo a olho nu; se não estiver limpo, repita as etapas anteriores de limpeza até que fique limpo a olho nu. Use um pano limpo umedecido com água para limpar o dispositivo e remover qualquer resíduo do agente de limpeza. Para secar, limpe o dispositivo com um pano limpo e seco. Os materiais de limpeza a seguir foram testados e considerados adequados para a limpeza do dispositivo.

- Água
- Água e sabão


DESINFECÇÃO DO SISTEMA

Para desinfetar a superfície do dispositivo, consulte as instruções específicas do fabricante do agente de limpeza.

- Solução alvejante de Clorox® a 10%
- Álcool isopropílico
- Solução de dialdeído ativado Cidex® a 2,4%


LISTA DE PEÇAS

RT-4546C

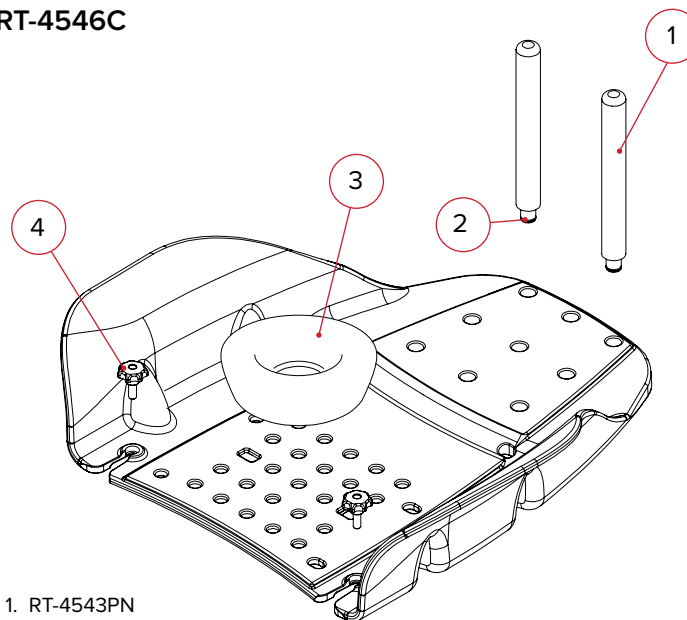

1. RT-4543PN
(Manípulos de empunhadura)
2. 3001419 (Anel de vedação)
3. RT-4546H (Apoio para cabeça de espuma)
4. 2004451 (Manípulo de aperto)

RT-4543C

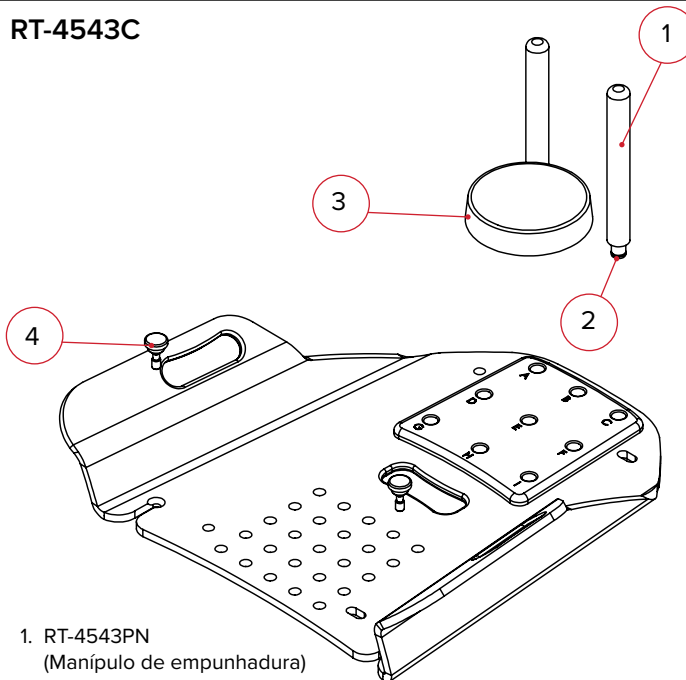

1. RT-4543PN
(Manípulo de empunhadura)
2. 3001419 (Anel de vedação)
3. 2000109 (Apoio para cabeça de espuma)
4. 2001643 (Manípulo)

FOLHA DE AJUSTES

RT-4543C E RT-4546C ARMSHUTTLE™ E ARMSHUTTLE™ ELITE

Nome do paciente:



Nº de ID do paciente:

Médico:

Comentários:

Ajuste realizado por:

Data:

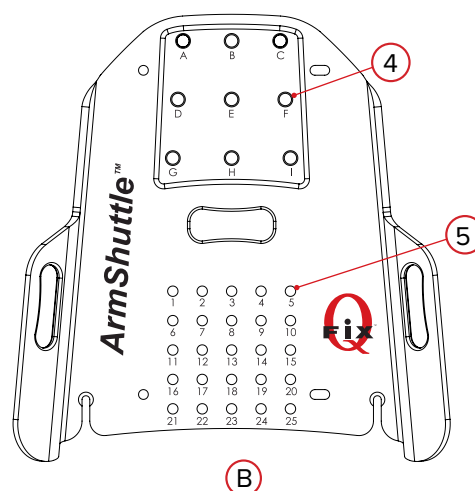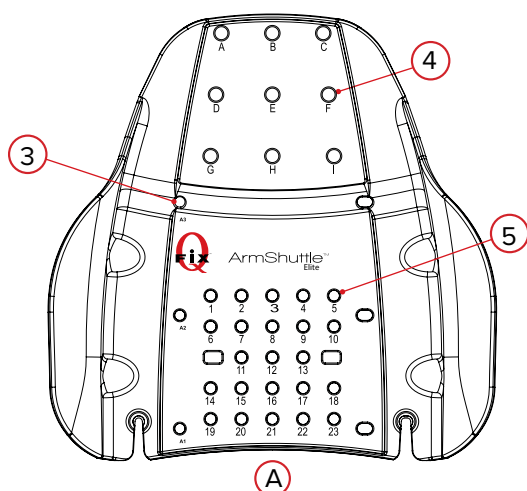

1. ArmShuttle utilizado (selecione um): ArmShuttle Elite com dispositivo Access™ Supine
ArmShuttle com dispositivo QUEST™ Breastboard Outro dispositivo:
2. Posição da(s) barra(s) de posicionamento no dispositivo (se aplicável):
3. Posição da(s) barra(s) de posicionamento (selecione os usados) (apenas para o ArmShuttle Elite):
A1 A2 A3 NENHUMA UTILIZADA
4. Posicionamento do(s) apoio(s) de mão(s) (selecione os usados):
A B C D E F G H I NENHUM UTILIZADO
5. Posicionamento do apoio de cabeça (número 1–25): Tipo de apoio de cabeça usado:

Observações



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004227_PT-BR_E
2021-07