

ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4543C ve RT-4546C

ArmShuttle[™] ve ArmShuttle[™] Elite





EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	A.B.D.'de üreten Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	--

Armshuttle, Quest ve Access Qfix şirketinin ticari markalarıdır.

Clorox®, The Clorox Company'nin tescilli ticari markasıdır.

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

İÇİNDEKİLER

GENEL ÖNLEMLER	4
UYARI İFADELERİ	4
CİDDİ OLAYLAR.....	4
UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI	4
KULLANIM AMACI.....	5
ÇALIŞTIRMA TALİMATI	6
BAKIM.....	7
SİSTEMİN TEMİZLENMESİ	7
SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ	7
PARÇA LİSTESİ.....	8
KURULUM SAYFASI.....	9
RT-4543C VE RT-4546C ARMSHUTTLE™ VE ARMSHUTTLE™ ELITE.....	9

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKİPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6054 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

! UYARI ! HASTANIN ARMSHUTTLE SAPLARINI KULLANARAK POZİSYONU AYARLAMASINA İZİN VERMEYİN.

! UYARI ! ARMSHUTTLE'İ HASTA YÜZEYİNİN AÇISINI AYARLAMAK İÇİN KULLANMAYIN.

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.

KULLANIM AMACI

Bu cihazın kullanım amacı, radyasyon tedavisi olan hastaları hareketsizleştirmek, konumlandırmak ve yeniden konumlandırmaktır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya onların siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI

Radyasyon tedavisi ya da diyagnostik görüntüleme prosedürleri uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.


ÇALIŞTIRMA TALİMATI



1



2

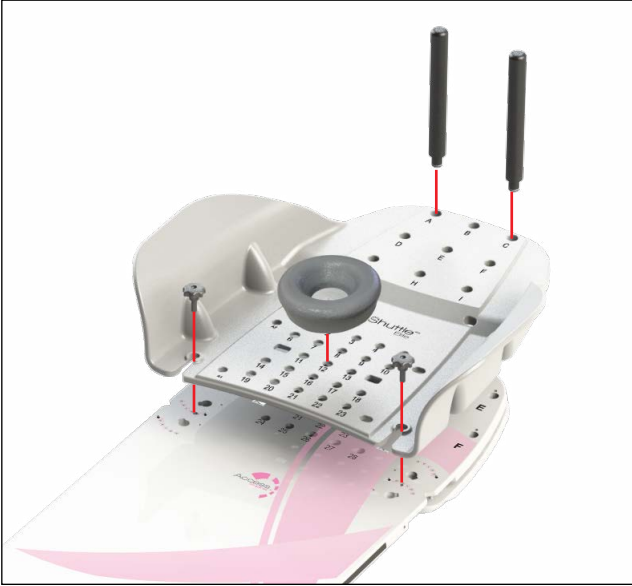

1



2

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz hafif, aşındırıcı olmayan temizlik ya da dezenfeksiyon solüsyonu ile temizlenebilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin. Cihazı görsel olarak inceleyin, eğer temiz değilse temiz görüne kadar önceki temizleme adımlarını tekrarlayın. Herhangi bir temizlik maddesi kalıntısını gidermek üzere cihazı silmek için suyla nemlendirilmiş temiz bir bez kullanın. Kurulamak için cihazı temiz, kuru bir bezle silin. Aşağıdaki temizlik malzemeleri test edilmiş ve cihazın temizlenmesi için uygun bulunmuştur.

- Su
- Sabun ve su


SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ

Cihaz yüzeyinin dezenfekte edilmesi için temizlik maddesi üreticisinin özel talimatlarına başvurun.

- %10 Clorox® Marka Çamaşır Suyu Solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® %2.4 Aktive Dialdehid Solüsyonu


PARA LİSTESİ

RT-4546C

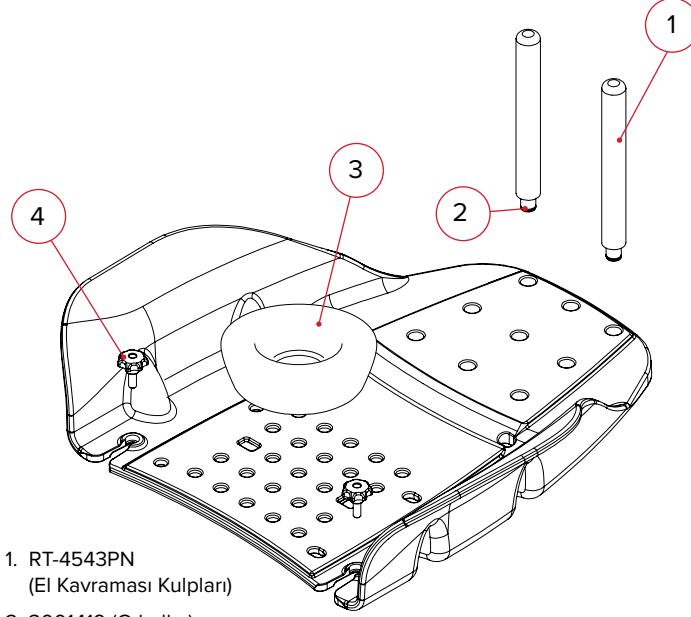

1. RT-4543PN
(El Kavraması Kulpları)
2. 3001419 (O halka)
3. RT-4546H (Köpük Baş Dayanağı)
4. 2004451 (Yivli Topuz)

RT-4543C

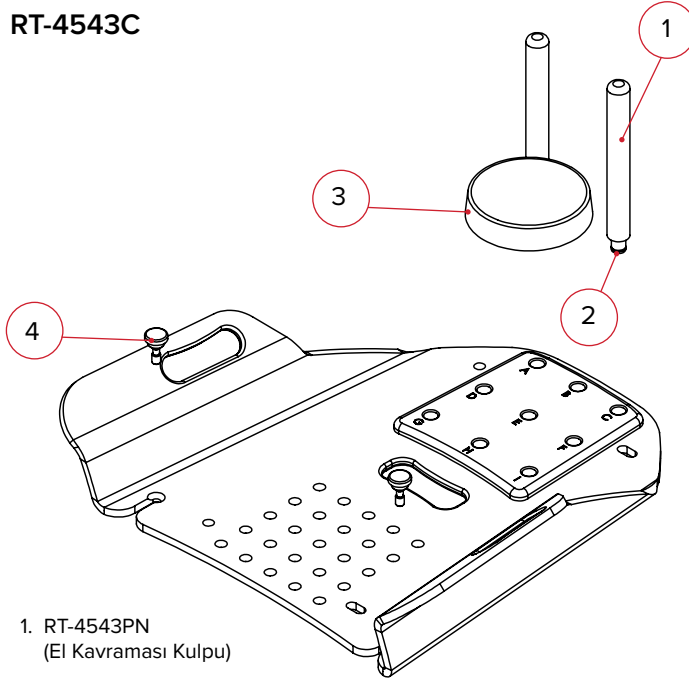

1. RT-4543PN
(El Kavraması Kulpu)
2. 3001419 (O halka)
3. 2000109 (Köpük Baş Dayanağı)
4. 2001643 (Topuz)

KURULUM SAYFASI

RT-4543C VE RT-4546C ARMSHUTTLE™ VE ARMSHUTTLE™ ELITE

Hastanın Adı Soyadı:



Hasta Tanılayıcı No.:

Hekim:

Yorumlar:

Kurulumu Yapan:

Tarih:

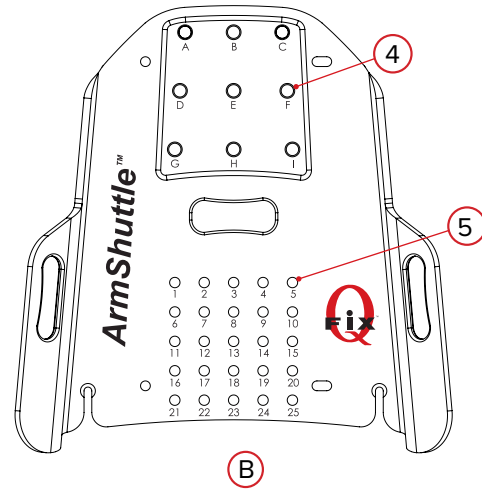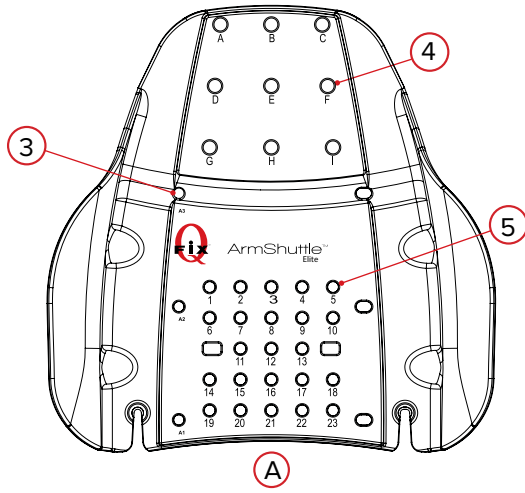

1. Kullanılan ArmShuttle (bir tane seçin): ArmShuttle Elite ile Access™ Supine ArmShuttle ile QUEST™ Breastboard
Diğer Cihaz:

2. Yerleştirme Çubuğunun (Çubuklarının) cihaz üzerindeki yeri (varsa):

3. Yerleştirme Çubuğunun (Çubuklarının) yeri (kullanılanları seçin) (sadece ArmShuttle Elite için):

A1 A2 A3 KULLANILMIYOR

4. El Direğinin (Direklerinin) yeri (kullanılanları seçin):

A B C D E F G H I KULLANILMIYOR

5. Baş Dayanağının yeri (no. 1–25): Kullanılan Baş Dayanağının türü:

Notlar:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com