



positioning
patients for life.®

产品说明和用户手册

RT-4543C 和 RT-4546C

ArmShuttle™ 和 ArmShuttle™ Elite





EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	美国制造，制造商为 科辅适 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, 美国 +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	---

产品名称：人体定位袋
医疗器械备案号： 20150038

Armshuttle, Quest 以及 Access 是 Qfix 的商标。

Clorox® 是 Clorox 公司的注册商标。

Cidex® 是 Johnson & Johnson 的注册商标。

目录

一般性注意事项	4
警告声明	4
严重事件	4
警告标签及说明	4
预期用途	5
操作说明	6
维护保养	7
清洁系统	7
对系统进行消毒	7
部件列表	8
设置表	9
RT-4543C 和 RT-4546C ARMSHUTTLE™ 和 ARMSHUTTLE™ ELITE	9

一般性注意事项

警告声明

！警告！ 不得修改本设备。如本装置的任何部分经受了过大的载荷、出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用并通过 +1 484-720-6054 或 techsupport@qfix.com 联系Qfix。

！警告！ 请勿让患者使用 ARMSHUTTLE 手柄调整位置。

！警告！ 请勿使用 ARMSHUTTLE 调整患者表面角度。

严重事件

请向 Qfix 和您所在国家/地区的主管当局报告任何严重事件（例如导致或可能造成死亡或严重伤害的事件）。

警告标签及说明

参见 Qfix.com 了解符号列表及其定义。

预期用途

该装置用于接受放疗病人的固定、定位和调整位置。

！注意！美国联邦法律限制此装置只能由医生或凭医嘱销售。

患者目标人群

接受放射治疗或诊断成像程序的患者。

预期用户

产品的预期用户是根据监管区域的要求取得资质的人员。


操作说明



1



2

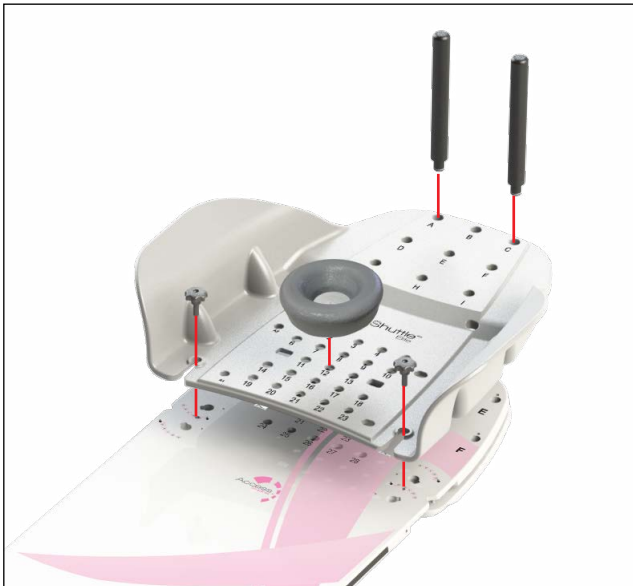

1



2

维护保养

清洁系统

装置可使用温和的非研磨性清洁或消毒液进行清洁。清洁时，用溶液润湿干净的布块后擦拭表面。目视检查装置，如果不干净，则重复先前的清洁步骤，直至目视干净。使用水浸湿的干净布块擦拭装置以清除任何清洁剂残留物。用干净的干布擦拭装置使其干燥。下列清洁材料已经过测试，证明适用于清洁此装置。

- 水
- 肥皂和水


对系统进行消毒

要消毒装置的表面，请参阅清洁剂厂商的特定说明。

- 10% Clorox® 漂白液
- 异丙醇
- Cidex® 2.4% 活化的二醛溶液


部件列表

RT-4546C

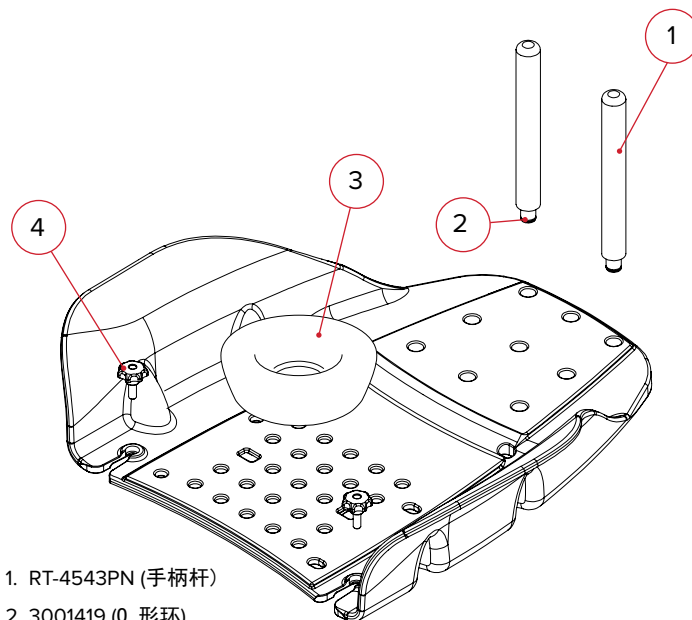

- 1. RT-4543PN (手柄杆)
- 2. 3001419 (O 形环)
- 3. RT-4546H (泡沫头枕)
- 4. 2004451 (螺纹旋钮)

RT-4543C

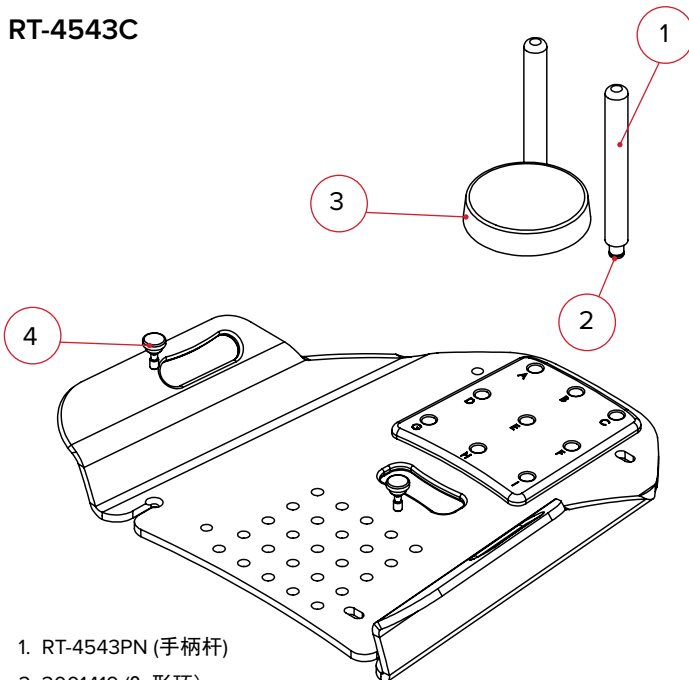

- 1. RT-4543PN (手柄杆)
- 2. 3001419 (O 形环)
- 3. 2000109 (泡沫头枕)
- 4. 2001643 (旋钮)

设置表

RT-4543C 和 RT-4546C ARMSHUTTLE™ 和 ARMSHUTTLE™ ELITE

患者姓名:



患者编号:

设置者:

医生:

日期:

注释:

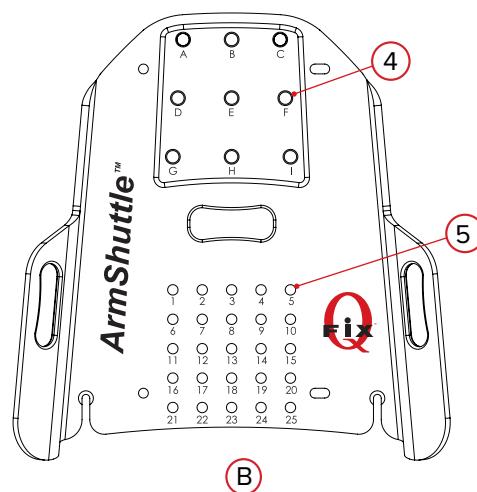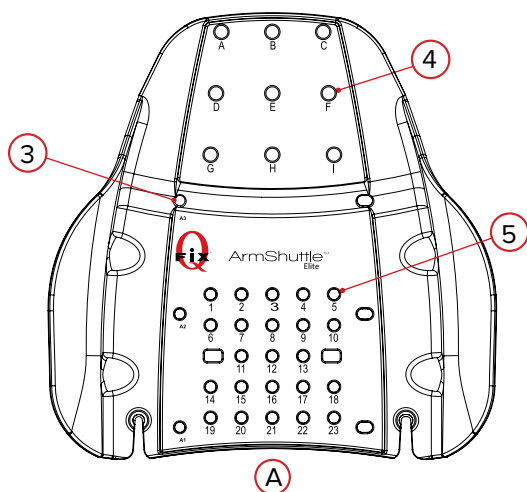

1. 使用的ArmShuttle (选择一个刻度) : ArmShuttle Elite (配 Access™ 仰卧板) ArmShuttle (配 QUEST™ 胸板)
其他装置:

2. 装置上的定位杆位置 (若适用) :

3. 定位杆位置 (选择已使用的刻度) (仅用于 ArmShuttle Elite) : A1 A2 A3 未使用

4. 手柱位置 (选择已使用的刻度) : A B C D E F G H I 未使用

5. 头枕位置 (数字1-25) : 所用头枕类型:

注:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 美国
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004227_ZH_E
2021-07