



positioning
patients for life.®

TUOTEOHJE JA KÄYTTÖOPAS

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01 ja RT-4546-02

Access™ Supine, rintakehä ja keuhkot

Access™ Supine MR, rintakehä ja keuhkot

Access™ Supine, rintakehä

Access™ Supine, rintakehä ja keuhkot, ei hilaa





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Valmistaja USA:ssa Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com
------------------------------	---	--

Exact® on Varian Medical Systemsin rekisteröity tavaramerkki.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix ja ArmShuttle Elite ovat Qfixin tavaramerkkejä.

Cidex® on Johnson & Johnsonin rekisteröity tavaramerkki.

Clorox® on The Clorox Companyn rekisteröity tavaramerkki.

! HUOMAA ! Näissä käyttöohjeissa Access Supine viittaa kaikkiin Access™ Supine -laitteisiin, mukaan lukien Access™ Supine, rintakehä ja keuhkot, Access Supine MR, rintakehä ja keuhkot ja Access™ Supine, rintakehä, ellei toisin ole mainittu.

SISÄLTÖ

YLEISET VAROTOIMET	4
VAROITUSLAUSEKKEET	4
VAKAVAT HAITTATAPAHTUMAT	4
ALUEET, JOIHIN LIITTYY PURISTUMISVAARA	4
HOITOSÄTEEN VAIMENTUMINEN	4
MAGNEETTIKUVAAUKSEEN (MRI) LIITTYVÄT TURVALLISUUSTIEDOT	5
VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET	6
KÄYTTÖTARKOITUS	7
OMINAISUUDET	8
KUVAUS.....	8
KOMPONENTIT.....	8
KÄYTTÖOHJEET.....	10
ASENNUS.....	10
ASETUKSET	11
POISTAMINEN	16
HUOLTO.....	17
JÄRJESTELMÄN PUHDISTAMINEN.....	17
JÄRJESTELMÄN DESINFIOIMINEN	17
REUNAMERKINNÄN KORVAAMINEN	18
TEKNISET TIEDOT.....	19
MITAT.....	19
OSALUETTELO	20
POTILASASENNUSKAAVIO	21
RT-4546: ACCESS SUPINE, RINTAKEHÄ JA KEUHKOT, RT-4546MRI: ACCESS SUPINE MR, RINTAKEHÄ JA KEUHKOT, RT-4546-01: ACCESS SUPINE, RINTAKEHÄ, TAI RT-4546-02: ACCESS SUPINE, RINTAKEHÄ JA KEUHKOT, EI HILAA.....	21
RT-4546: ACCESS SUPINE, RINTAKEHÄ JA KEUHKOT, RT-4546MRI: ACCESS SUPINE MR, RINTAKEHÄ JA KEUHKOT, RT-4546-01: ACCESS SUPINE, RINTAKEHÄ, TAI RT-4546-02: ACCESS SUPINE, RINTAKEHÄ JA KEUHKOT, EI HILAA.....	22

YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSLAUSEKKEET

! VAROITUS ! TÄTÄ LAITTEISTOA EI SAA MUUNTAAN MILLÄÄN TAVALLA. JOS TÄMÄN LAITTEEN MITÄÄN OSAA KUORMITETAAN LIIKAA TAI NE NÄYTTÄVÄT VAURIOITUNEELTA TAI TOIMIVAT VIRHEELLISESTI, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYTTÄ QFIXIIN, PUH. +1 484-720-6053 TAI SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEeseen TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! VAROITUS ! VARMISTA, ETTÄ KULMANOSTIMET OVAT HYVIN SARANAN KOHDALLA OLEVASSA URASSA ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. JOS NÄIN EI TOIMITA, LAITE SAATTAA VAURIOITUA TAI SE SAATTAA AIHEUTTAA VAMMOJA.


! VAROITUS ! ÄLÄ KOSKAAN NOSTA TAI LASKE NOSTIMIA, KUN POTILAS ON LAITTEESSA.

! VAROITUS ! ÄLÄ KOSKAAN NOSTA TAI KANNA LAITETTA SEN KÄSI- TAI RANNETUISTA.

! VAROITUS ! POTILAS EI SAA SÄÄTÄÄ ASENTOA ARMSHUTTLE-KAHVOJEN AVULLA.

! VAROITUS ! POTILAS EI SAA SÄÄTÄÄ ASENTOA KÄSI- JA RANNETUKIEN AVULLA.

! VAROITUS ! POTILASALUSTAN KULMAA EI SAA SÄÄTÄÄ ARMSHUTTLE-KAHVAN AVULLA.

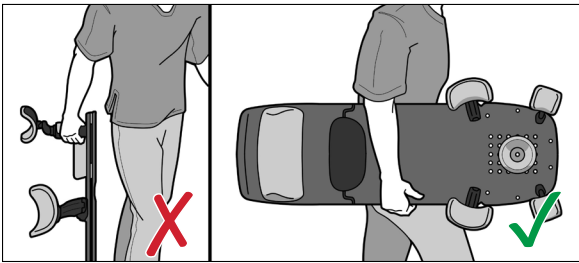

VAKAVAT HAITTATAPAHTUMAT

Ilmoita kaikista vakavista haittatapahtumista (esim. tapahtumat, joista seuraa tai voi seurata kuolema tai vakava vamma) sekä Qfixille että oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

ALUEET, JOIHIN LIITTYY PURISTUMISVAARA

- Alueet, joihin liittyy puristumisvaara, saattavat syntyä, kun käsi- tai rannetukien korkeutta säädetään.
- Alueet, joihin liittyy puristumisvaara, saattavat syntyä, kun käsi- tai rannetukien kulmaa säädetään.
- Alueet, joihin liittyy puristumisvaara, saattavat syntyä potilasalustan ja pohjalevyn väliselle sarana-alueelle.

HOITOSÄTEEN VAIMENTUMINEN

Access Supine -laite on suunniteltu niin, että potilas voidaan asettaa useimmille posteroanteriorisille (PA) hoitokentille sopivalla tavalla niin, että säde kulkee laitteen keuhkosuojien läpi. Access Supine -laitteen rakenteellisten alueiden vesiekvivalentti on 6 MV:ssä 5 mm. Hoitopöydän läpi tapahtuva hoito lisää tätä vaimentumista. Todellinen asennuskokoonpanosta riippuva vaimentuminen on varmistettava käytössä olevalla laitteistolla. Minkä tahansa laitteen kautta tapahtuva hoito, komposiittimateriaalista valmistetut laitteet mukaan lukien, aiheuttaa lisääntyntä ihoaltistusta.

YLEISET VAROTOIMET

MAGNEETTIKUVAAKSEEN (MRI) LIITTYVÄT TURVALLISUUSTIEDOT

 **20 asteen ja 25 asteen valinnaiset lisävarustenostimet** sopivat magneettikuvauksessa käytettäväksi.

Muu kuin kliininen testaus on osoittanut, että **20 asteen ja 25 asteen valinnaiset lisävarustenostimet** sopivat käytettäväksi magneettikuvausjärjestelmässä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

- Nostimia on käytettävä Access Supine -laitteen magneettikuvaukseen sopivan version kanssa (RT-4546MRI), joka on merkitty selkeästi seuraavalla symbolilla:



 **Käsi- ja rannetuet** ovat tietyin edellytyksin magneettikuvaukseen sopiva.

Muu kuin kliininen testaus on osoittanut, että **käsi- ja rannetuet** sopivat käytettäväksi magneettikuvausjärjestelmässä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

- **Käsi- ja rannetuet** voidaan asettaa magneettikuvausjärjestelmän putkeen, jos sen staattinen magneettikenttä on enintään 1,5 T.
- **Käsi- ja rannetukia** on käytettävä Access Supine -laitteen magneettikuvaukseen sopivan version kanssa (RT-4546MRI) sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Access Supine -laitteen magneettikuvaukseen sopiva versio (RT-4546MRI) on merkitty selkeästi seuraavalla symbolilla:



 **Alareunan pysäytin** on tietyin edellytyksin MR-turvallinen.

Muu kuin kliininen testaus on osoittanut, että **alareunan pysäytin** sopii käytettäväksi magneettikuvausjärjestelmässä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

- **Alareunan pysäytin** voidaan asettaa magneettikuvausjärjestelmän putkeen, jos sen staattinen magneettikenttä on enintään 1,5 T.
- **Alareunan pysäytintä** on käytettävä Access Supine -laitteen magneettikuvaukseen sopivan version kanssa (RT-4546MRI) sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Access Supine -laitteen magneettikuvaukseen sopiva versio (RT-4546MRI) on merkitty selkeästi seuraavalla symbolilla:



YLEISET VAROTOIMET


VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET

Symboliluettelo ja symbolien määritelmät löytyvät osoitteesta Qfix.com.



ENIMMÄISKUORMITUS

Tasaisesti jaettu kuorma tai kVue-sisäkkeen tai hoitopöytäalustan turvallinen enimmäistyökuorma EI SAA olla yli 249 kg (550 lb), näistä pienemmän mukaan.

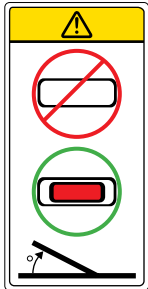

NOSTINVAROITUS

Kun Access Supine -laitetta käytetään kulmassa, varmista, että nostin on lukittu paikalleen ja nostimen punaiset päät näkyvät laitteen päädystä nähden.

Access Supine -laitteen käyttö kulmassa niin, ettei nostinta ole lukittu paikalleen, voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja.



TURVALLINEN MAGNEETTIKUVAUKSESSA

Kohde ei aiheuta tunnettuja vaaroja, jotka aiheutuvat altistumisesta magneettikuvausympäristölle. Magneettikuvauksessa turvalliset kohteet koostuvat materiaaleista, jotka eivät johda sähköä, eivät sisällä metalleja eivätkä ole magneettisia.

! HUOMAA ! VAIN RT-4546MRI.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä laite on tarkoitettu sädehoitoa saavien potilaiden immobilisointiin, asemointiin ja uudelleenasemointiin.

! HUOMAA ! Yhdysvaltojen liittovaltion lainsäädäntö rajoittaa tämän laitteen myynnin vain lääkäreille tai lääkärin määräyksestä.

POTILASKOHDERYHMÄT

Potilaat, jotka saavat sädehoitoa tai joille tehdään diagnostisia kuvantamistoimenpiteitä.

TARCOITETUT KÄYTTÄJÄT

Tuotteiden tarkoitettu käyttäjä on henkilö, jolla on kyseisellä lainkäyttöalueella edellytetty pätevyys.




OMINAISUUDET

KUVAUS

Access Supine -laitetta tulisi käyttää kahden kaksipinnisen paikannintangon, kuten RT-4551BAR:n, kanssa, jotta se voidaan kiinnittää turvallisesti simulaatio- tai hoitopöydän pintaan. Paikannintangot eivät ole osa Access Supine -laitetta ja ne on ostettava erikseen hoitopöydän valmistajalta.

Access Supine -laite käyttää valinnaisia käsitukia (RT-4546AA-01) ja rannetukia (RT-4546AW-01) olkavarren ja ranteiden pitämiseen toistettavassa asennossa. Valinnaista ArmShuttle™-kahvaa (RT-4546C) voidaan käyttää käsi- ja rannetukien sijaan.

KOMPONENTIT

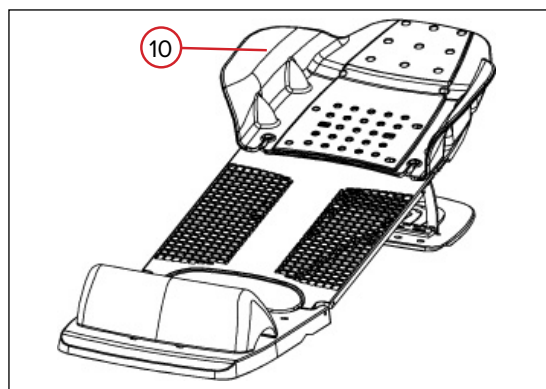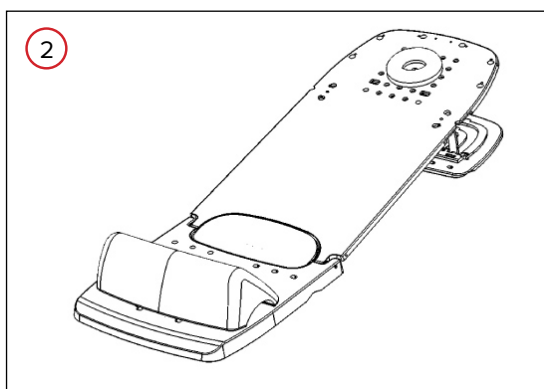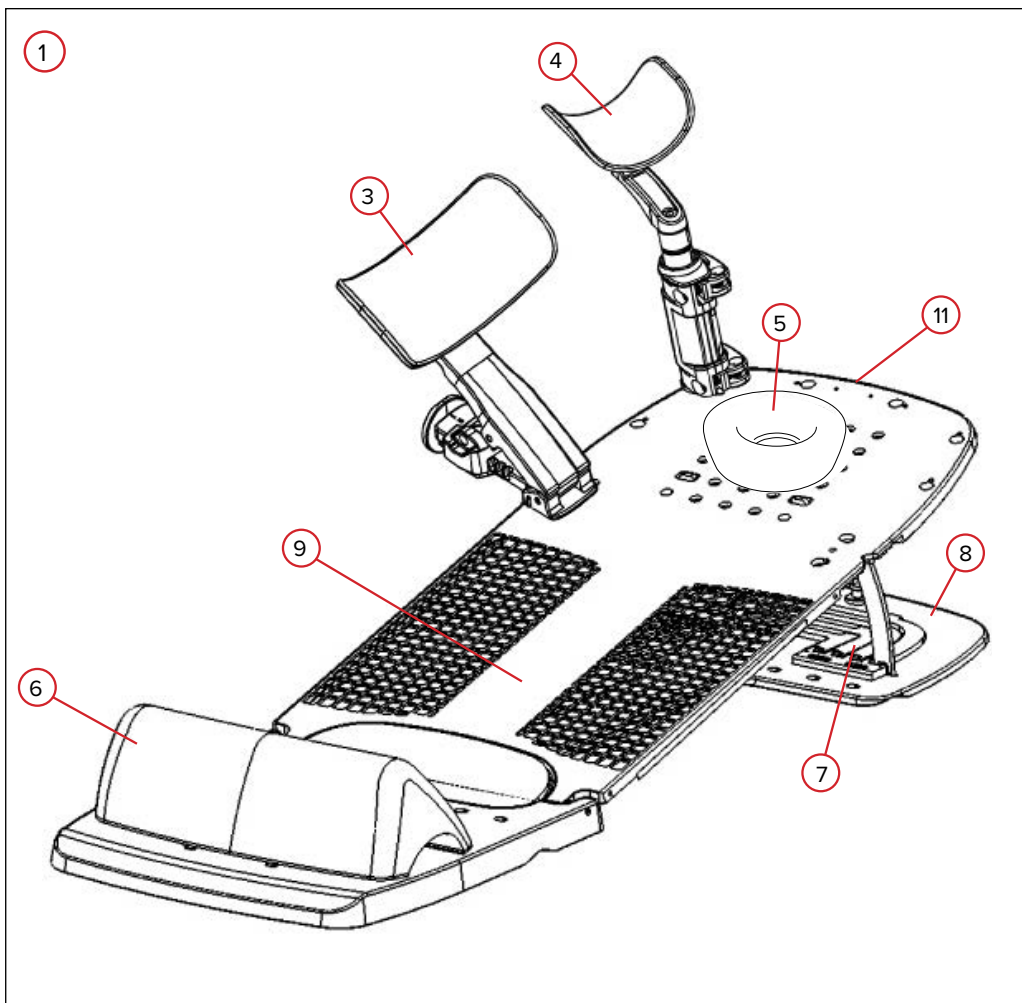

OMINAISUUDET

KOMPONENTIT

1. ACCESS SUPINE, RINTAKEHÄ JA KEUHKOT, ACCESS SUPINE, RINTAKEHÄ JA ACCESS SUPINE, RINTAKEHÄ JA KEUHKOT, EI HILAA

Access Supine -järjestelmää käytetään rintakehän ja keuhkojen sädehoitoa saavien potilaiden asemointiin ja valmisteluun.

2. ACCESS SUPINE MR, RINTAKEHÄ JA KEUHKOT

Access Supine MR -laite (maalattu valkoiseksi) toimii samalla tavalla kuin Access Supine -laite, mutta se sopii käytettäväksi magneettikuvauksessa.

3. KÄSITUKI

Käsitukia voidaan säätää monella tavalla, jotta potilaiden olkavarret voidaan asettaa tarkasti tiettyyn asentoon simulaation ja hoidon aikana.

4. RANNETUKI

Rannetukia voidaan säätää tukemaan potilaan ranteita simulaation ja hoidon aikana.

5. PÄÄTUKI

Laitteen mukana tuleva päätuki voidaan asettaa Access Supine -laitteessa moneen eri kohtaan (merkitty numeroin 1–28). Myös valinnaisia päätukia on saatavilla, mukaan lukien suuria ja pieniä geelipäätukia ja TIMO B -pätuki.

6. ALAREUNAN PYSÄYTIN

Mukana toimitettu indeksimerkitty alareunan pysäytin varmistaa potilaan oikean asennon estämällä sen, että potilas voisi valua alas Access Supine -laitetta pitkin.

7. KULMANOSTIMET

Kulmanostinten avulla potilaan pää ja torso voidaan asettaa pystysuuntaisiin 0, 5, 7,5, 10, 12,5 ja 15 asteen kulmiin. Valinnaiset lisävarusteenostimet sallivat potilaan pään ja torson asettamisen pystysuuntaisiin 20 tai 25 asteen kulmiin.

8. POHJALEVY

Pohjalevy tarjoaa kiinnityskohdat kulmanostimille ja alareunan pysäyttimelle ja mahdollistaa turvallisen simulaatio- tai hoitopöydän kiinnittämisen.

9. POTILASALUSTA

Potilasalusta on laitteen se osa, jota voidaan säätää 0–15 asteeseen hoitoa varten.

10. ARMSHUTTLE ELITE -KAHVA

ArmShuttle Elite -kahvaa voidaan käyttää käsitukien sijaan potilaan käsivarsien oikeaan asentoon asettamiseen simulaation ja hoidon aikana. Sitä käytetään yleensä VacQfix™-tyyny kanssa.

11. LUKITUSKYTKIN

Lukituskytkin kiinnittää potilasalustan pohjalevyyn.


KÄYTTÖOHJEET

ASENNUS


ACCESS SUPINE -LAITTEEN ASENNUS

1. Työnnä paikannintankojen päät Varian Exact® -yhteensopivan hoitopöytäalustan tai -laitteen indeksintiloihin noin ne 700 mm:n päähän toisistaan (yleensä 5 lovea) ja napsauta paikannintangot paikoilleen. (kuva 1)
2. Aseta Access Supine -laite paikannintangon päälle niin, että pohjalevy on samassa linjassa kuin paikannintankojen kaksi pinniä. (kuva 2)
3. Työnnä Access Supine -laite paikannintankoon ja lukitse Access Supine -laite paikalleen. (kuva 3)


! HUOMAA ! Access Supine -laite voidaan asettaa myös hieman sivuun kummasta tahansa puolesta, jotta kasvain on tarvittaessa lähempänä säteiden leikkauskohtaa.

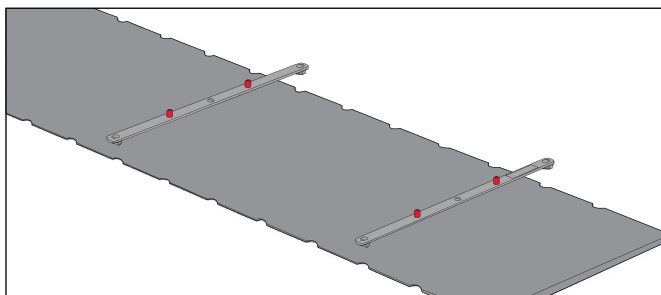

KUVA 1

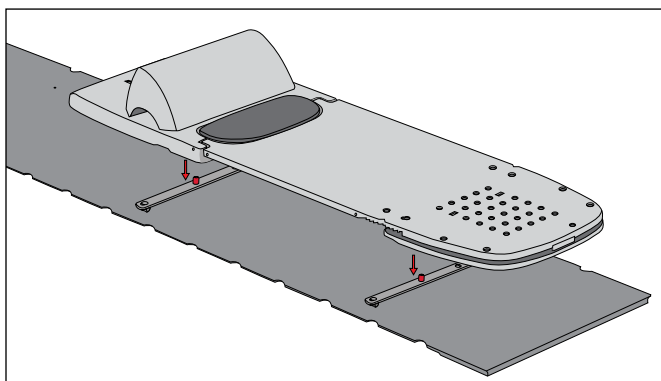

KUVA 2

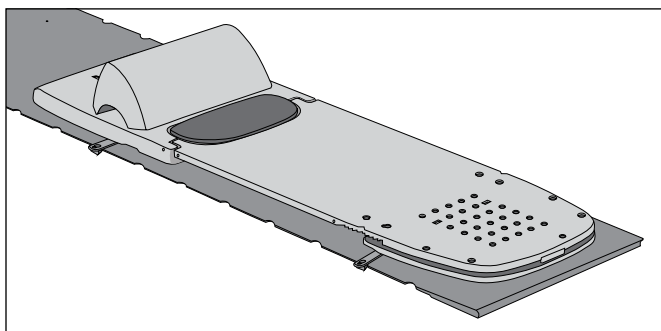

KUVA 3


KÄYTTÖOHJEET

ASETUKSET


POTILASKULMA

! HUOMIO ! KUN ACCESS SUPINE -LAITETTA KÄYTETÄÄN KULMASSA, VARMISTA, ETTÄ KULMANOSTIMET ON LUKITTU YLÄPANEELIIN JA PUNAISET PÄÄT NÄKYVÄT LAITTEEN YLÄPUOLELTA. JOS KULMANOSTIMIA EI OLE LUKITTU PAIKALLEEN, SE VOI AIHEUTTAA VAMMOJA POTILAALLE JA/TAI LAITTEEN VAURIOITUMISEN.


1. Lukitus voidaan avata painamalla lukituskytkintä. (kuva 4)
2. Nosta potilasalustaa ja nosta kulmanostin oikeaan asentoon. (kuvat 5 ja 6)
3. Laske potilasalustaa, kunnes kulmanostin lukittuu sille tarkoitettuihin kohtiin. Kun kulmanostimet on lukittu, niiden punaiset päät ovat näkyvissä potilasalustassa. (kuva 7)

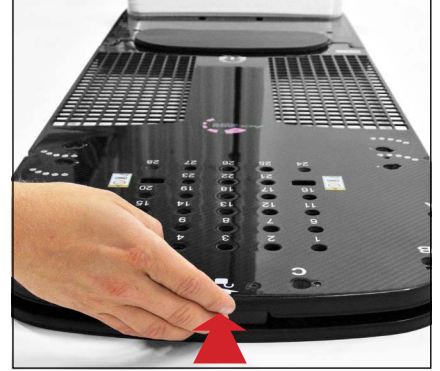


KUVA 4

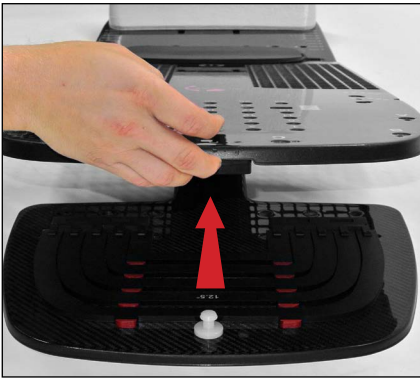

KUVA 5

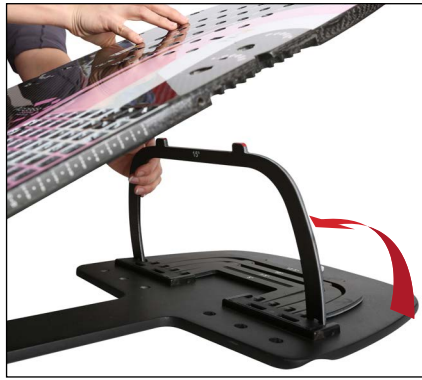

KUVA 6

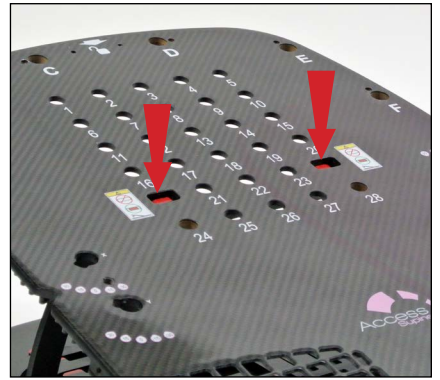

KUVA 7


! HUOMAA ! 20 tai 25 asteen VALINNAISET lisävarustustenostimet voidaan asentaa asettamalla kumpi tahansa niistä kulmanostinsaranan avoimiin aukkoihin. (kuva 8)




KUVA 8

PÄÄTUKI

Asenna päätuki johonkin saatavilla olevista sijainneista (1–28) potilasalustan yläpäässä. (kuvat 9 ja 10)

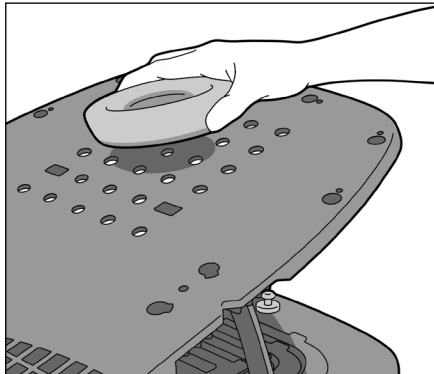

KUVA 9

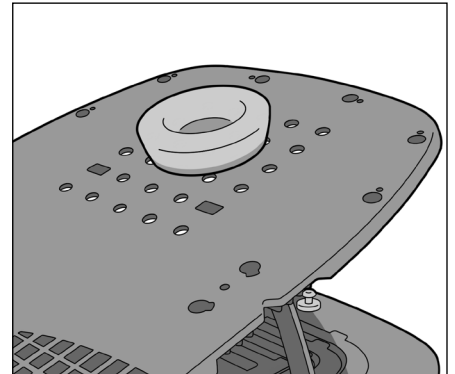


KUVA 10

KÄYTTÖOHJEET


ASETUKSET

KÄSITUKI


1. Käsituki voidaan liittää löystämällä sen nuppia ja asettamalla tuki yhteen kahdesta sijainnista (merkitty X:llä ja Y:llä). Lukitse käsituki potilasalustaan kiristämällä nuppia. (kuva 11)
 2. Käsituen asentoa voidaan säätää löystämällä nuppia ja kääntämällä käsitukea haluttuun kohtaan. Lukitse käsituki lopuksi kiristämällä nuppia uudelleen. (kuva 12)
- ! HUOMIO ! ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA.**
3. Korkeutta voidaan säätää painamalla korkeussäätimen painiketta ja liu'uttamalla tukea vartta pitkin. Kun käsituki on halutussa asennossa, päästä irti painikkeesta. (kuva 13)
 4. Varren pituutta voidaan säätää painamalla pituussäätimen painiketta ja liu'uttamalla tukea vartta pitkin. Kun käsituki on halutussa asennossa, päästä irti painikkeesta. (kuva 14)

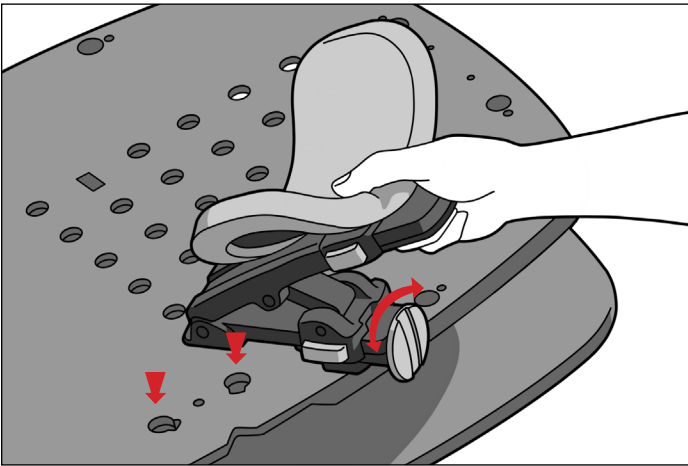


KUVA 11

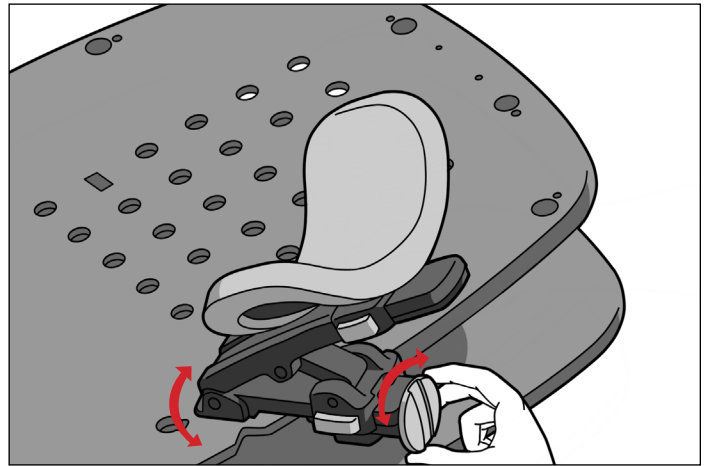

KUVA 12

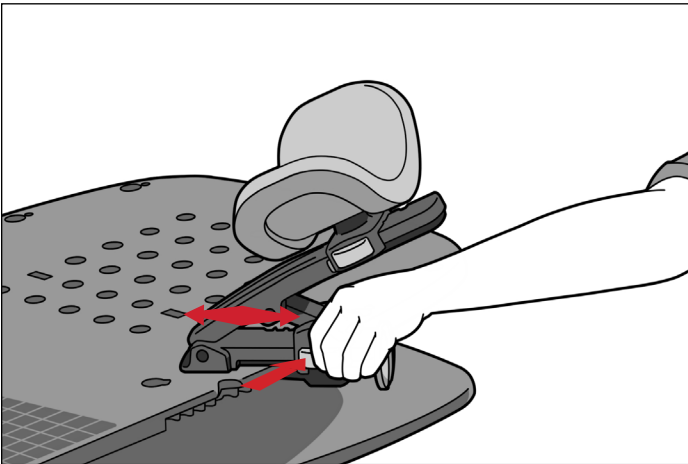

KUVA 13

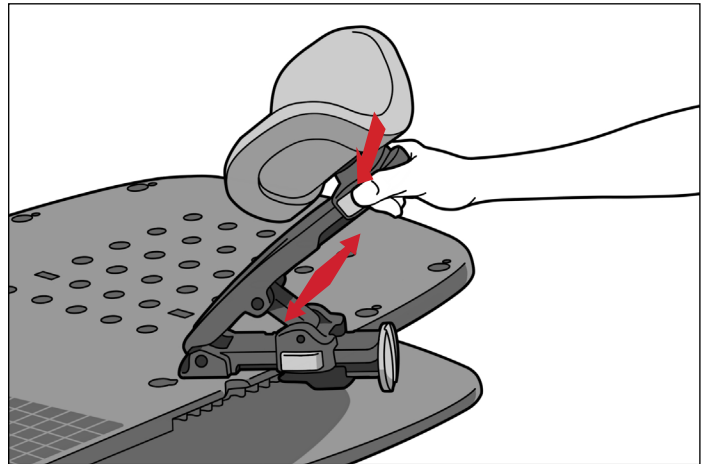


KUVA 14

KÄYTTÖOHJEET


ASETUKSET

RANNETUKI


1. Rannetuki kiinnitetään asettamalla molemmat rannetuen pohjassa olevat tapit potilasalustan niitä vastaaviin aukkoihin. (kuva 15)
2. Lukitse tuki sulkemalla alempi vipu. (kuva 16)
3. Rannetukea voidaan nostaa tai laskea avaamalla ylempi vipu. Nosta, laske tai käännä tukea haluttuun asentoon ja sulje sitten ylempi vipu uudelleen. (kuva 17 ja kuva 18)

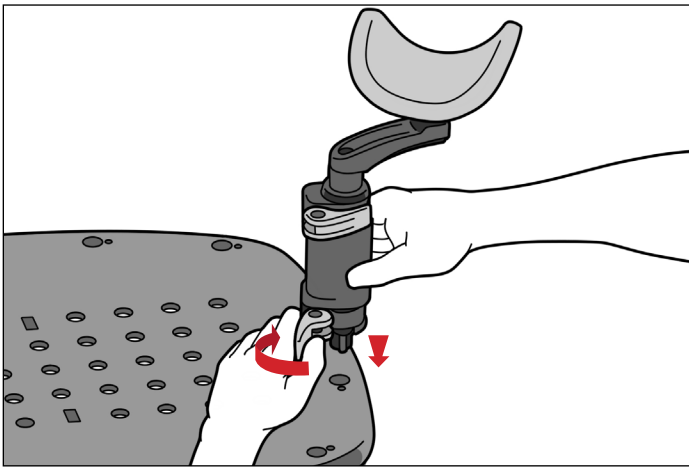


KUVA 15

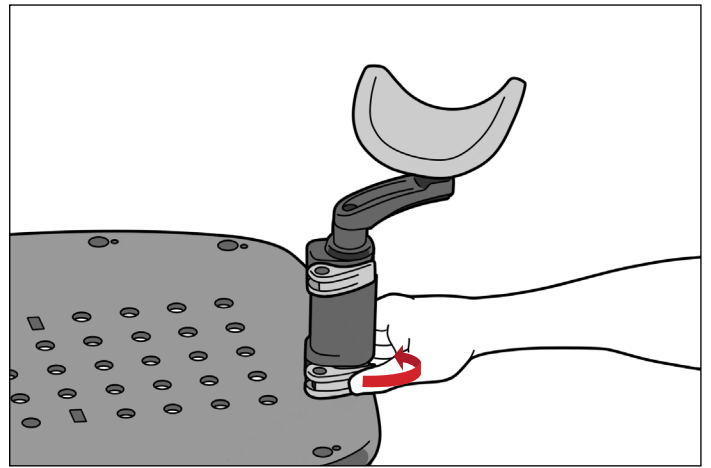

KUVA 16

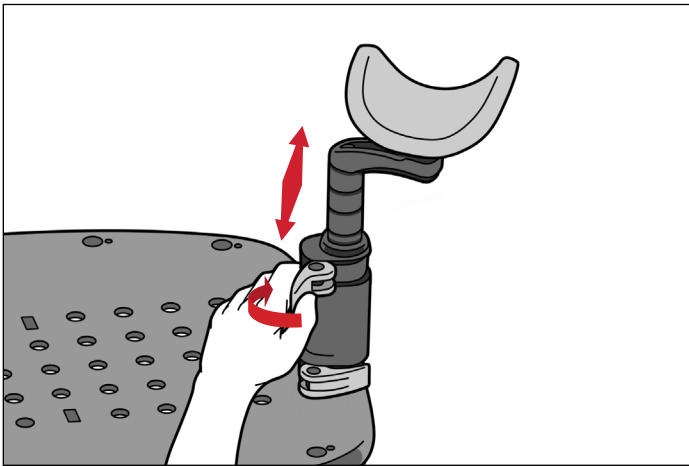

KUVA 17

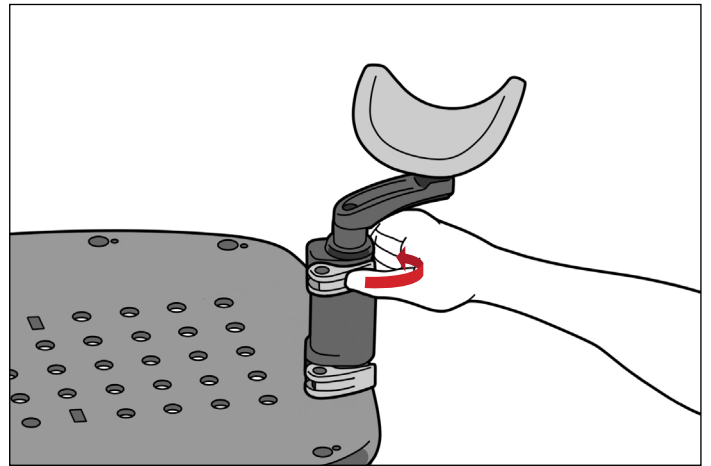

KUVA 18

KÄYTTÖOHJEET

ASETUKSET

ALAREUNAN PYSÄYTIN

1. Aseta alareunan pysäytin niin, että sen kaareva puoli osoittaa potilasalustaa kohti. Aseta pysäytin sille sopivaan, aukkojen alareunassa olevaan kohtaan. (kuva 19)
2. Kun alareunan pysäytin on liitetty pohjalevyyn, se voidaan asettaa sopivaan asentoon työntämällä sitä eteenpäin (alareunan pysäytin lukittuu tässä suunnassa). (kuva 20)
3. Jos alareunan pysäytintä on siirrettävä taaksepäin, nosta sitä hieman ylös ja liu'uta se haluttuun sijaintiin. (kuva 21)

! HUOMAA ! Kuvassa 22 näytetään alareunan pysäyttimen ja kannatintangon indeksilovien sijainnit.



KUVA 19



KUVA 20



KUVA 21



KUVA 22

KÄYTTÖOHJEET


ASETUKSET

ARMSHUTTLE ELITE -KAHVA


! HUOMAA ! ArmShuttle-kahva on vaihtoehto käsi- ja rannetuille. Tarkista ArmShuttle-kahvan (osanro 2004227) käyttöön liittyvät käyttöohjeet, tuoteominaisuudet, tekniset tiedot, varoitukset, huomiot ja muut yleiset varotoimet ArmShuttle-kahvan tuoteohjeesta ja käyttöoppaasta.

1. Irrota käsitet löystämällä nuppia, kääntämällä käsitukea niin, että se on samassa linjassa potilasalustan reunassa olevan loven kanssa, ja vedä käsituki irti potilasalustan aukoista. (kuva 23)
2. Poista rannnetuet avaamalla alempi vipu ja vetämällä rannnetuki ulos potilasalustan aukoista. (kuva 24)
3. Aseta ArmShuttle-kahva Access Supine -laitteen päälle niin, että kiinnitysnuppiaukot ovat samassa linjassa Access Supine -laitteen käsitukisijaintien välissä olevien kierteitettyjen aukkojen kanssa. (kuva 25)
4. Kiinnitä ArmShuttle-kahva kiinnitysnupprien avulla kääntämällä niitä myötäpäivään, kunnes ne ovat tiukasti kiinni. (kuva 25)


! HUOMAA ! Kuvassa 26 näkyy valmis kokoonpano.

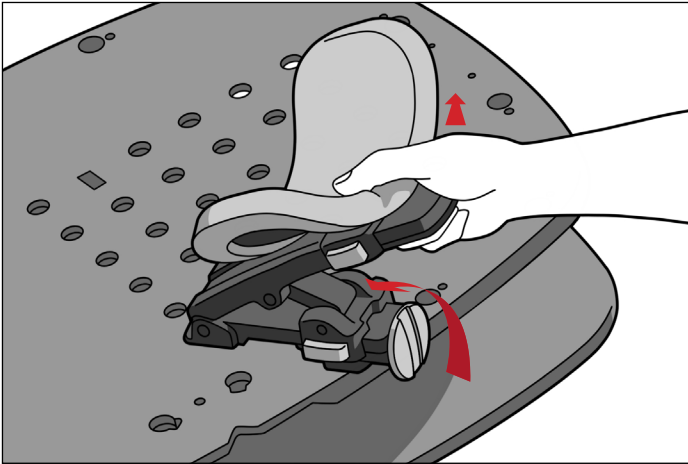

KUVA 23

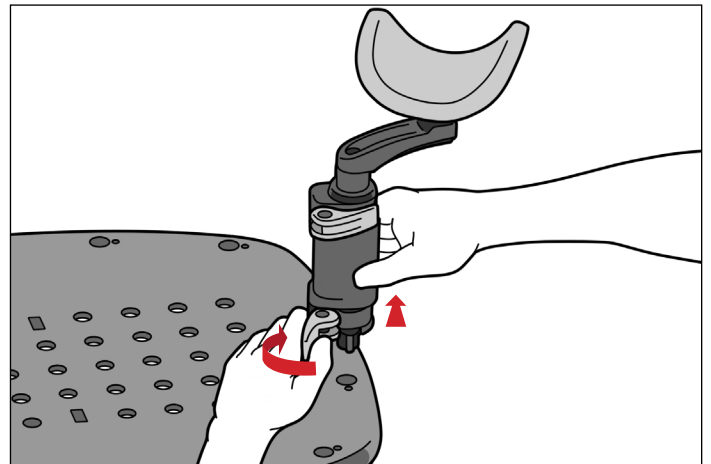

KUVA 24

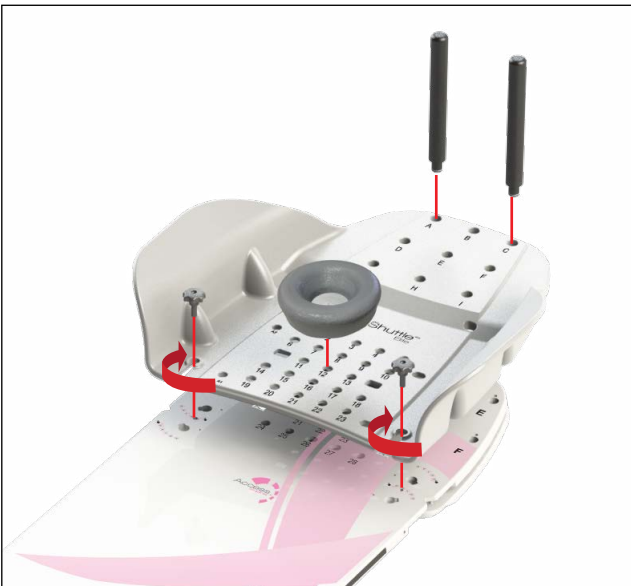

KUVA 25



KUVA 26

TUOTEOHJE JA KÄYTTÖOPAS – 2004394_IFU, Access Supine_FI

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | ☎ +1 484-720-6053 | 📠 +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

KÄYTTÖOHJEET

POISTAMINEN

ARMSHUTTLE ELITE -KAHVA

1. Poista ArmShuttle-kahvan kiinnittävät nupit kääntämällä niitä vastapäivään.
2. Toista vaihe 1 toisella puolella.
3. Nosta ArmShuttle-kahva irti potilasalustasta.

ALAREUNAN PYSÄYTIN

1. Siirrä alareunan pysäytintä taaksepäin nostamalla sitä hieman ylös ja liu'uta se poistosijaintiin.
2. Nosta alareunan pysäytin irti pohjalevystä.

KÄSITUKI

Löystä nuppia ja käännä käsitukea niin, että se on samassa linjassa potilasalustan reunassa olevan loven kanssa, ja vedä käsituki irti potilasalustan aukoista.

RANNETUKI

Avaa alempi vipu ja vedä rannetuki ulos potilasalustan aukoista.

PÄÄTUKI

Nosta päätukea, kunnes se irtoaa paikanninaukosta.

ACCESS SUPINE

1. Nosta potilasalustaa ja laske kulmanostinta, kunnes se on vaakasuorassa asennossa pohjalevyn päällä.
2. Laske potilasalustaa, kunnes kuulet naksahduksen, ja lukitse se pohjalevyyn.
3. Nosta Access Supine -laite irti kannatintangoista.
4. Nosta kannatintankoja molemmista päistä ja poista ne hoitopöydästä.

HUOLTO

JÄRJESTELMÄN PUHDISTAMINEN

Laite voidaan puhdistaa miedolla, hankaamattomalla pesu- tai desinfiointiliuoksella. Puhdista kostuttamalla puhdas liina liuokseen ja pyyhkimällä pinta. Tarkasta laite silmämääräisesti, ja jos se ei ole puhdas, toista edellä olevat vaiheet, kunnes laite on silmämääräisesti puhdas. Pyyhi mahdolliset pesuainejäämät laitteen pinnalta puhtaalla, veteen kostutetulla liinalla. Kuivaa laite pyyhkimällä se puhtaalla, kuivalla liinalla. Seuraava pesuaine on testattu ja sen on todettu soveltuvan laitteen puhdistamiseen.

- Vesi
- Saippua ja vesi

JÄRJESTELMÄN DESINFIOIMINEN

Laitteen pinnan desinfioinnissa on noudatettava pesuaineen valmistajan erityisohjeita.

- 10 % Clorox®-valkaisuaineliuos
- Isopropyylialkoholi
- 2,4-prosenttinen aktivoitu Cidex®-dialdehydiliuos


Kaikkien kiinnikkeiden kireys on tarkistettava säännöllisesti.

HUOLTO


REUNAMERKINNÄN KORVAAMINEN

1. Poista tämänhetkinen reunamerkintä täysin, mukaan lukien liimajäämät.
2. Irrota uuden merkinnän taustapaperi.
3. Varmista, että sivuasteikon keskellä oleva asetusmerkki on samassa linjassa potilasalustan rekisteröintimerkin kanssa ja merkinnän alareuna on vain hieman potilasalustan alareunan yläpuolella. Nolla on sijoitettava laitteen pääpuoleiseen reunaan. (kuva 27 ja kuva 28)
4. Kiinnitä koko merkintä tiukasti laitteen reunaan.
5. Toista tarvittaessa toisella puolella.

! HUOMAA ! ÄLÄ kiinnitä merkintää potilasalustan taitoskohtaan, sillä merkintä saattaa irrota kyseisestä kohdasta.

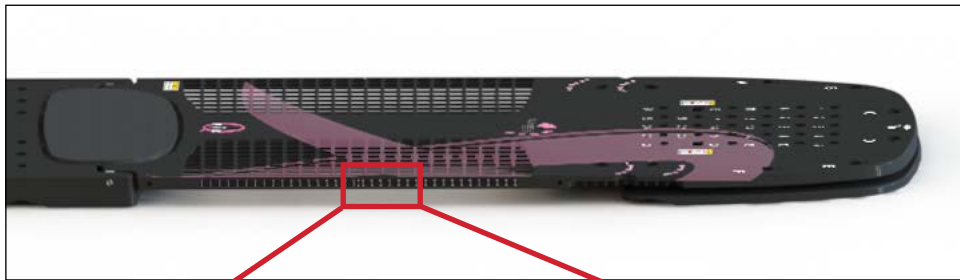

KUVA 27

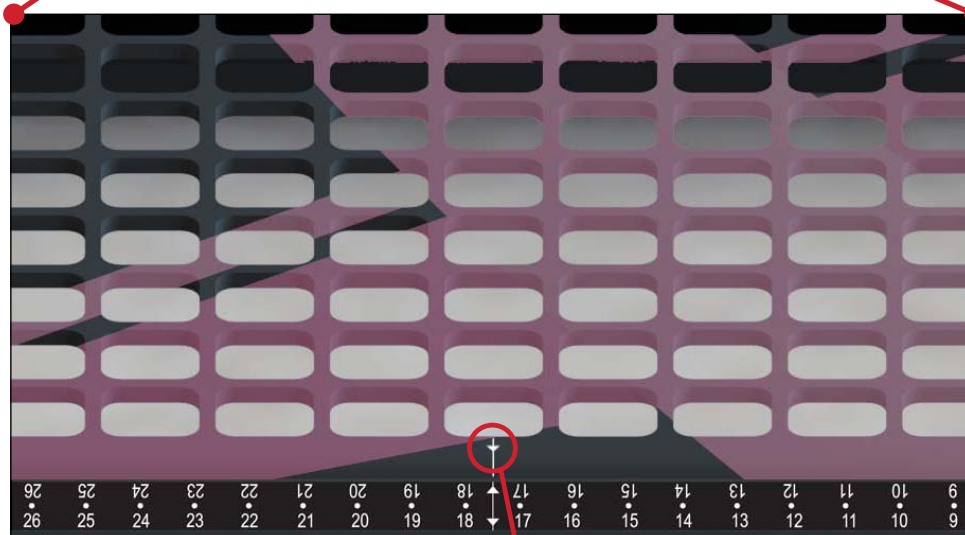

KUVA 28

rekisteröintimerkki


TEKNISET TIEDOT

MITAT


Pituus (P): 1374 mm

Painoraja: 249 kg (550 lb), tasaisesti jaettu kuorma

Vesiekvivalentti: Huomaa: Vain RT-4546 – Access™ Supine, rinta ja keuhkot:
~ 3 mm @ 6 MV hoitoalueilla

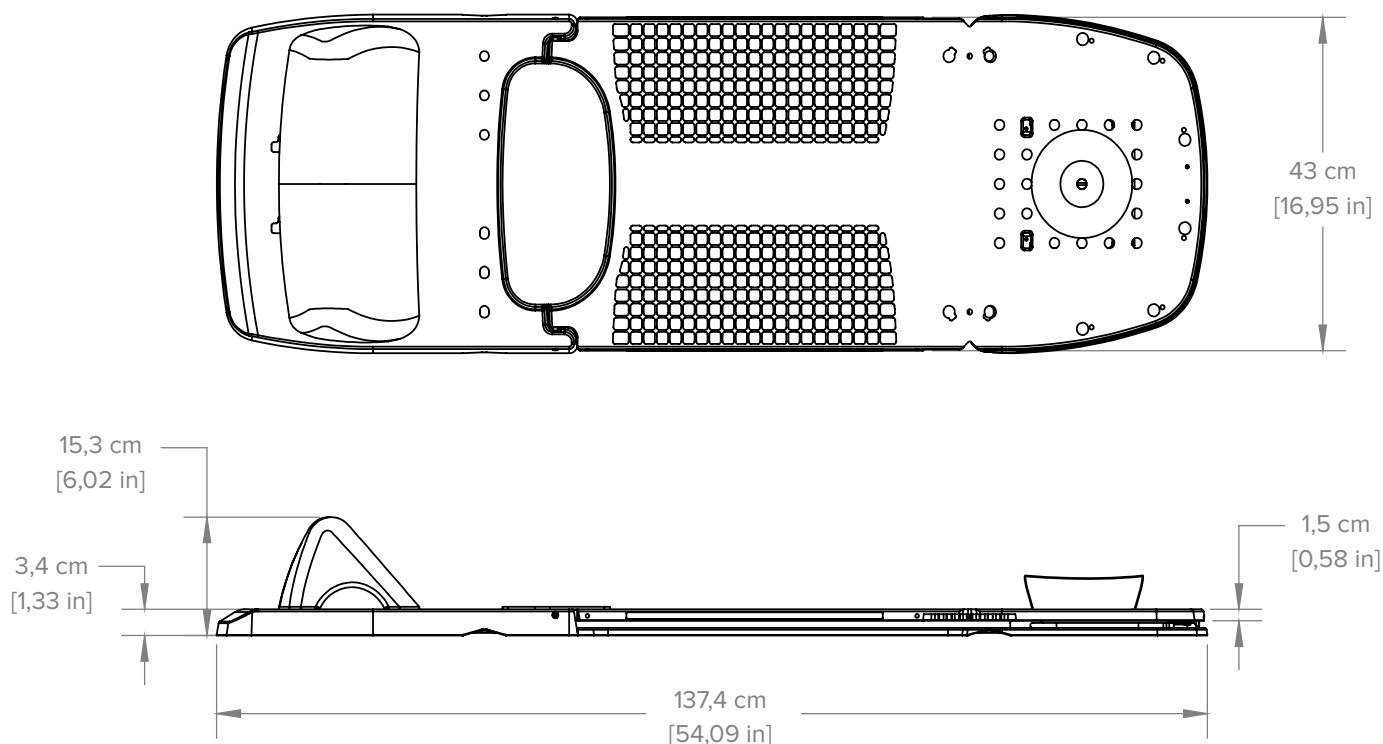

OSALUETTELO

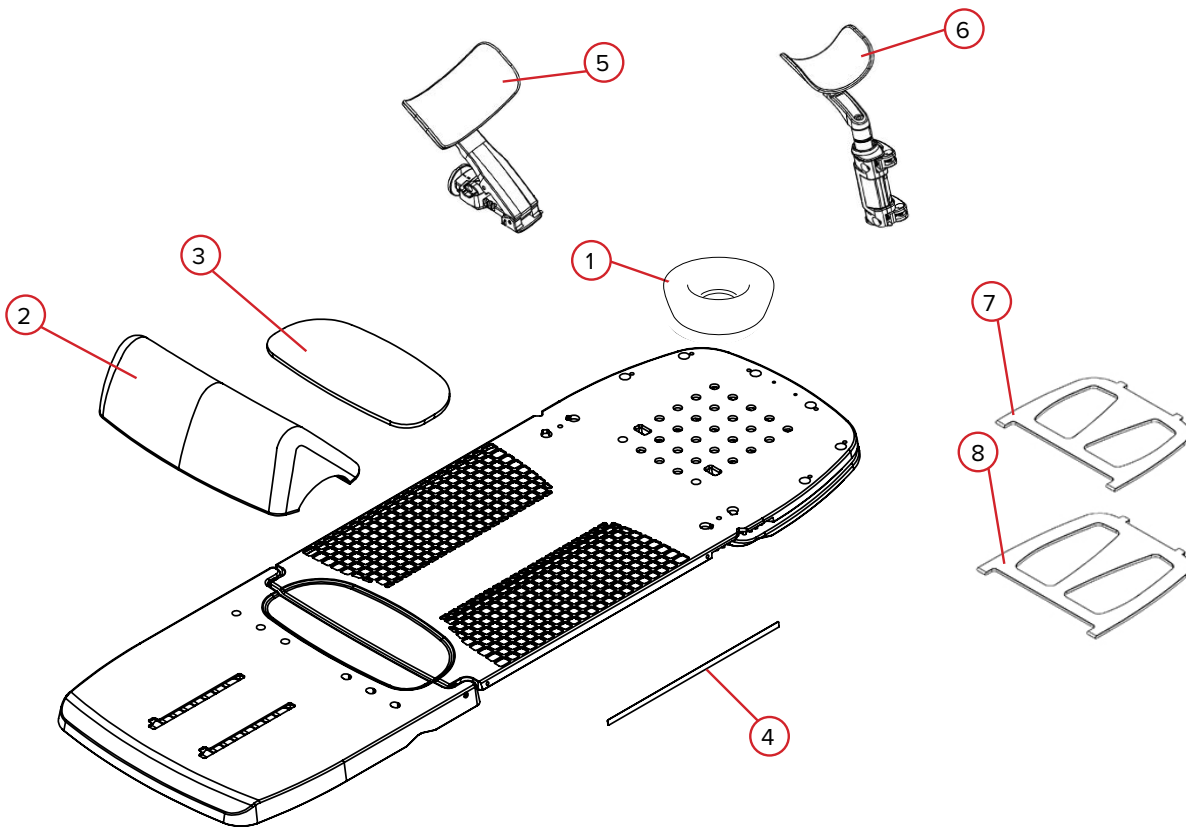

RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01 ja RT-4546-02

- 1. RT-4546H – Vaahtomuovinen päätuki
- 2. 2004034 – Vaahtomuovinen alareunan pysäytinkokoonpano
- 3. 2004047 – Häntäluupehmuste
- 4. 2004392 – Reunamerkintä (1 per reuna)

RT-4546AA-01

- 5. 2005353 – Vaahtomuovinen käsituen pehmuste, käsivarren ympärille ulottuva

RT-4546AW-01

- 6. 2005386 – Vaahtomuovinen rannetuen pehmuste, ranteen ympärille ulottuva

RT-4546L

- 7. 2004121 – Lisävarustenostin, 20 asteen
- 8. 2004122 – Lisävarustenostin, 25 asteen

POTILASASENNUSKAAVIO

RT-4546: Access Supine, rintakehä ja keuhkot, RT-4546MRI: Access Supine MR, rintakehä ja keuhkot,
RT-4546-01: Access Supine, rintakehä, tai RT-4546-02: Access Supine, rintakehä ja keuhkot, ei hilaa

Potilaan nimi:


Potilastunniste:

Asentaja:

Lääkäri:

Pvm:

Muistiinpanot:

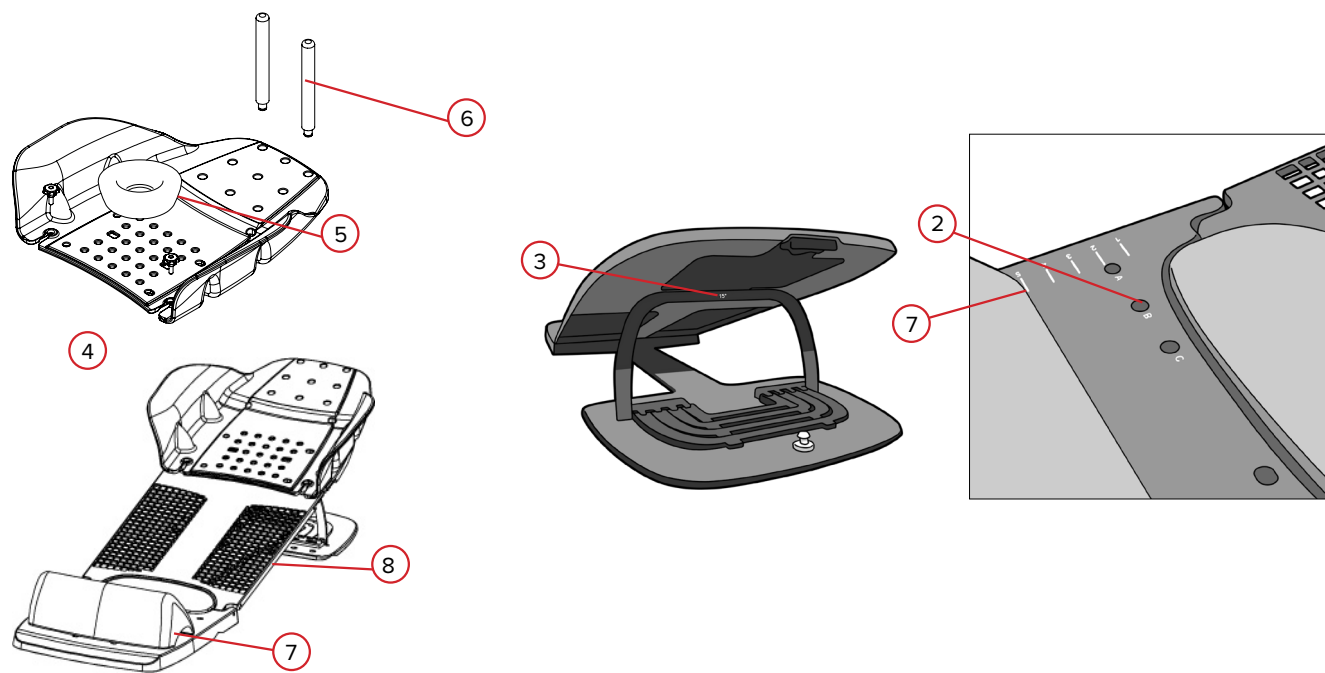

1. Indeksoitu simulaatio- tai hoitopöytään? **Kyllä** **Ei** Jos kyllä, indeksilovien asetus
2. Paikannintangon pinnien sijainti (valitse yksi): **A** **B** **C**
3. Potilasalustan kulma (valitse yksi): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. ArmShuttle käytössä: **Kyllä** **Ei**
5. Päätuen sijainti (numerot 1–28):
6. Käsitukien sijainti (valitse käytettävät)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **EI KÄYTÖSSÄ**
7. Onko alareunan pysäytin käytössä? **Kyllä** **Ei** Jos kyllä, millä asetuksella? (numerot 1–8)
8. Reunamerkintälaserin sijainti:

POTILASASENNUSKAAVIO

RT-4546: Access Supine, rintakehä ja keuhkot, RT-4546MRI: Access Supine MR, rintakehä ja keuhkot,
RT-4546-01: Access Supine, rintakehä, tai RT-4546-02: Access Supine, rintakehä ja keuhkot, ei hilaa

Potilaan nimi:


Potilastunniste:

Asentaja:

Lääkäri:

Pvm:

Muistiinpanot:

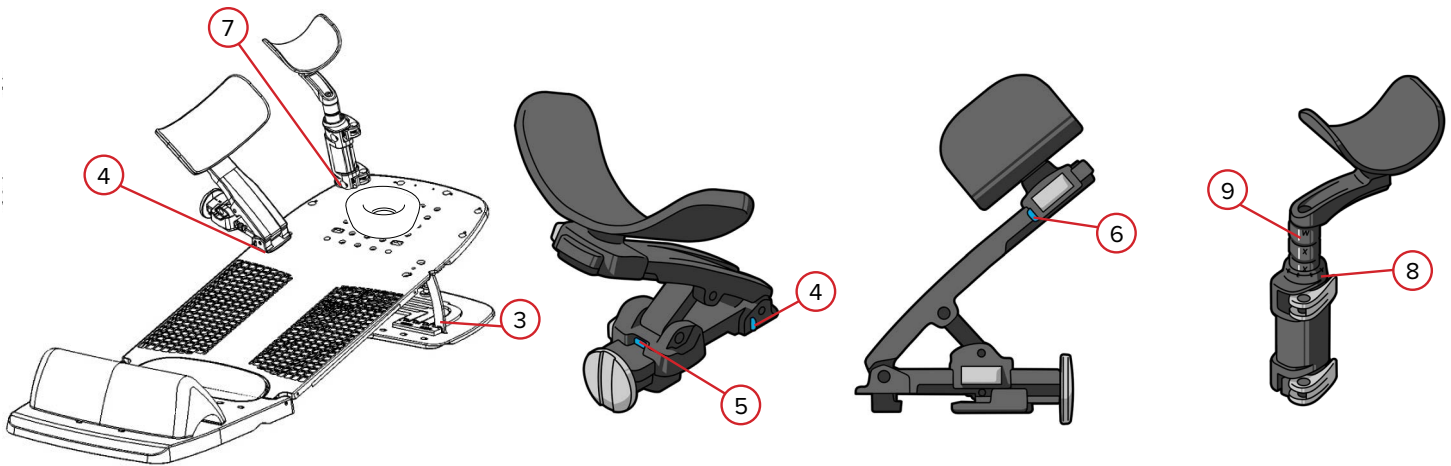

- Indeksoitu simulaatio- tai hoitopöytään? **Kyllä** **Ei** Jos kyllä, indeksilovien asetus
- Paikannintangon pinnien sijainti (valitse yksi): **A** **B** **C**
- Potilasalustan kulma (valitse yksi): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Käsitukien sijainti ja kulma (valitse yksi) –
Potilaan vasen: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Potilaan oikea: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Käsitukien korkeus (numerot 1–8): Potilaan vasen Potilaan oikea
- Käsitukien pituus (valitse yksi): Potilaan vasen: **A** **B** **C** Potilaan oikea: **A** **B** **C**
- Rannetukien sijainti (kirjaimet A–H): Potilaan vasen Potilaan oikea
- Rannetukien kulma:
Potilaan vasen: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Potilaan oikea: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Rannetukien korkeus (kirjaimet W–Z): Potilaan vasen Potilaan oikea



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 484.20.6053 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com