

VODIČ I KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA PROIZVOD

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01 i RT-4546-02

Access™ Supine za dojke i pluća

Access™ Supine za MR za dojke i pluća

Access™ Supine za dojke

Access™ Supine za dojke i pluća, bez rešetke



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Exact® je registrirani zaštitni znak društva Varian Medical Systems.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix i ArmShuttle Elite zaštitni su znakovi društva Qfix.

Cidex® je registrirani zaštitni znak društva Johnson & Johnson.

Clorox® je registrirani zaštitni znak društva The Clorox Company.

! NAPOMENA ! U cijelim ovim uputama za uporabu „Access Supine” odnosi se na sve proizvode Access™ Supine, uključujući Access™ Supine za dojke i pluća, Access Supine za MR za dojke i pluća i Access™ Supine za dojke, osim ako nije drukčije navedeno.

OPĆE MJERE OPREZA

UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NISU DOPUŠTENE NIKAKVE PREINAKE OVE OPREME. AKO BILO KOJI DIO OVOG PROIZVODA BUDE IZLOŽEN OPTEREĆENJU KOJE UZROKUJE KVAR, DOIMA SE OŠTEĆENIM ILI NEPRAVILNO RADI, SMJESTA GA PRESTANITE UPOTREBLJAVATI I OBRATITE SE DRUŠTVU CQ MEDICAL NA +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ILI SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! UPOZORENJE ! PRIJE KORIŠTENJA PROIZVODA PROVJERITE JESU LI LJESTVE POD KUTOM PRIČVRŠĆENE U UTORU DUŽ ŠARKE. U SUPROTNO MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA PROIZVODA ILI OZLJEDA.


! UPOZORENJE ! NIPOŠTO NEMOJTE PODIZATI NI SPUŠTATI LJESTVE DOK JE PACIJENT NA PROIZVODU.

! UPOZORENJE ! PROIZVOD NIPOŠTO NEMOJTE PODIZATI NI NOSITI DRŽEĆI GA ZA OSLOMCE ZA RUKU ILI ZAPEŠĆE.

! UPOZORENJE ! NE DOZVOLITE PACIJENTU DA PRILAGODI POLOŽAJ KORIŠTENJEM RUČKI PROIZVODA ARMSHUTTLE.

! UPOZORENJE ! NE DOZVOLITE PACIJENTU DA PRILAGODI POLOŽAJ KORIŠTENJEM OSLOMCA ZA RUKU ILI ZAPEŠĆE.

! UPOZORENJE ! NE UPOTREBLJAVAJTE ARMSHUTTLE ZA PRILAGOĐAVANJE KUTA POVRŠINE ZA PACIJENTA.

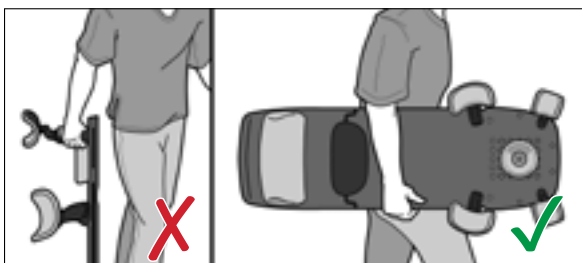

OZBILJNI ŠTETNI DOGAĐAJI

Sve ozbiljne štetne događaje (npr. štetne događaje koji dovode ili bi mogli dovesti do smrti ili teške ozljede) prijavite društvu CQ Medical i nadležnom tijelu u svojoj zemlji.

ZONE PRIGNJEČENJA

- Prilikom podešavanja visine oslonca za ruku ili oslonca za zapešće može doći do zona prignječenja.
- Prilikom podešavanja kuta oslonca za ruku ili oslonca za zapešće može doći do zona prignječenja.
- Unutar šarke između površine za pacijenta i postolja stola može doći do zona prignječenja.

PRIGUŠENJE TERAPIJSKOG SNOPA

Proizvod Access Supine osmišljen je tako da se pacijent može postaviti tako da se većina posteroanteriornih (PA) polja terapije može rasporediti s zrakom koja prolazi kroz izreze proizvoda za pluća. Strukturna područja

OPĆE MJERE OPREZA

proizvoda Access Supine imaju ekvivalent vode od 5 mm pri 6 MV. Tretman kroz stol za terapiju povećat će tu atenuacija. Stvarno prigušenje koje se temelji na postavkama treba provjeriti s vašom opremom. Terapija bilo kojim proizvodom, čak i onim izrađenim od kompozitnih materijala uzrokovat će povećanje kožne doze.

INFORMACIJE O SIGURNOSTI U OKRUŽENJU SNIMANJA MAGNETSKOM REZONANCIJOM

 **Dodatne ljestve pod kutom od 20 stupnjeva i 25 stupnjeva sigurne su za korištenje tijekom snimanja magnetskom rezonancijom.**

Nekliničko ispitivanje pokazalo je da se **dodatne ljestve pod kutom od 20 stupnjeva i 25 stupnjeva** mogu koristiti u MR sustavu koji zadovoljava sljedeće uvjete:

- Ljestve se moraju koristiti s verzijom proizvoda Access Supine (RT-4546MRI) koja je sigurna za korištenje tijekom snimanja magnetskom rezonancijom koji je jasno označen sljedećim simbolom prije snimanja magnetskom rezonancijom:



 **Oslonci za ruku i zapešće mogu koristiti tijekom snimanja magnetskom rezonancijom pod određenim uvjetima.**

Nekliničko ispitivanje pokazalo je da se **oslonci za ruku i zglob** mogu koristiti u MR sustavu koji ispunjava sljedeće uvjete:

- Oslonci za ruku i zapešće mogu se postaviti u otvor sustava za magnetsku rezonanciju koji ima statičko magnetsko polje 1,5 T ili manje.
- Oslonci za ruku i zapešće moraju se koristiti s verzijom proizvoda Access Supine (RT-4546MRI) u skladu s njegovom namjenom prije snimanja magnetskom rezonancijom.
- Verzija proizvoda Access Supine (RT-4546MRI) sigurna za snimanje magnetskom rezonancijom jasno je označena sljedećim simbolom:



 **Donji graničnik može se koristiti tijekom snimanja magnetskom rezonancijom pod određenim uvjetima.**

Nekliničko ispitivanje pokazalo je da se **donji graničnik** može koristiti u MR sustavu koji ispunjava sljedeće uvjete:

- Donji graničnik može se postaviti u otvor sustava za magnetsku rezonanciju koji ima statičko magnetsko polje 1,5 T ili manje.
- Donji graničnik mora se koristiti s verzijom proizvoda Access Supine (RT-4546MRI) u skladu s njegovom namjenom prije snimanja magnetskom rezonancijom.
- Verzija proizvoda Access Supine (RT-4546MRI) sigurna za snimanje magnetskom rezonancijom jasno je označena sljedećim simbolom:



OPĆE MJERE OPREZA


OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Popis simbola i njihove definicije potražite na web-mjestu CQmedical.com.



DOPUŠTENO OPTEREĆENJE

NEMOJTE prekoračiti težinu od 249 kg (550 funti) ravnomjerno raspoređenog opterećenja ili maksimalnu sigurnosnu nosivost umetka kVue ili postolja stola, ovisno o tome koja je vrijednost niža.

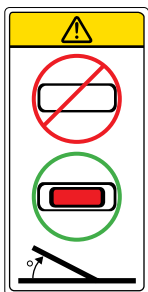

UPOZORENJE ZA LJESTVE

Kada koristite Access Supine pod kutom, ljestve moraju biti čvrsto pričvršćene na mjesto, a crveni krajevi ljestava vidljivi su s vrha proizvoda.

Uporaba proizvoda Access Supine pod kutom bez pravilnog pričvršćivanja ljestvi na mjesto može oštetiti proizvod ili uzrokovati ozljede.



SIGURNO ZA SNIMANJE MAGNETSKOM REZONANCIJOM

Predmet koji ne predstavlja poznatu opasnost uslijed izlaganja okruženju magnetske rezonancije. Predmeti sigurni za snimanje magnetskom rezonancijom sastavljeni su od materijala koji nisu električno provodljivi, metalni ni magnetni.

! NAPOMENA ! SAMO ZA RT-4546MRI.

NAMJENA

Ovaj je uređaj namijenjen za imobilizaciju, namještanje i ponovno namještanje pacijenata podvrgnutih radioterapiji.

! NAPOMENA ! Prema saveznom zakonu SAD-a ovaj proizvod može se kupiti samo od liječnika ili na preporuku liječnika.

CILJNE SKUPINE PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju radioterapiji ili postupcima dijagnostičkog snimanja.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda osoba je kvalificirana u skladu sa zahtjevima regulatornog područja.




ZNAČAJKE

OPIS

Access Supine treba koristiti s 2 dvopinske prečke za određivanje položaja, kao što je RT-4551BAR, za sigurno pričvršćivanje na ploču za simulaciju ili terapiju. Ove prečke za određivanje položaja nisu uključene u Access Supine i moraju se kupiti zasebno od proizvođača stola.

Access Supine koristi dodatne oslonce za ruku (RT-4546AA-01) i oslonce za zapešće (RT-4546AW-01) kako bi se gornji dio ruku i zapešća držali u reprodukcijском položaju. Dodatni ArmShuttle™ (RT-4546C) može se koristiti umjesto oslonca za ruku i zapešće.

KOMPONENTE

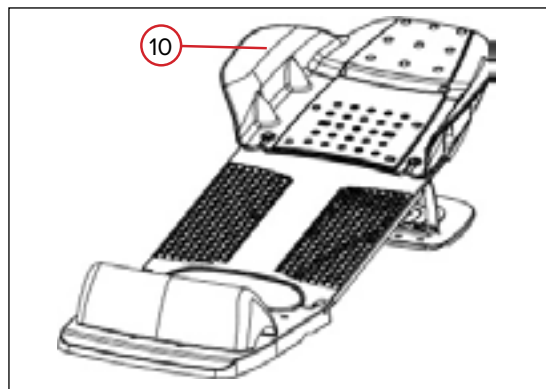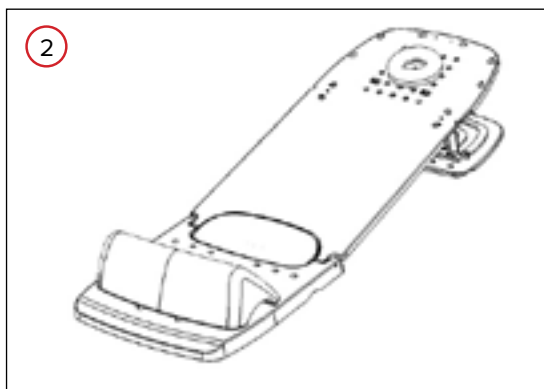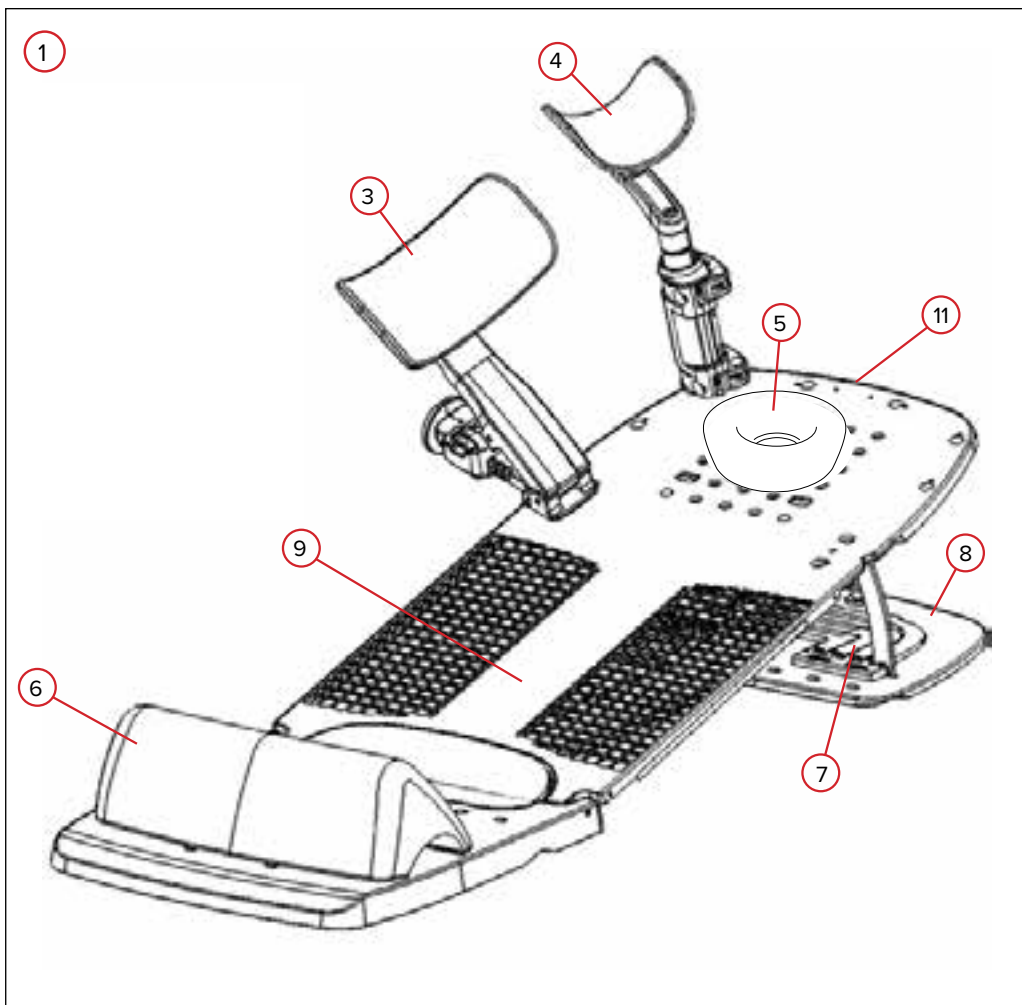

ZNAČAJKE

KOMPONENTE

1. ACCESS SUPINE ZA DOJKE I PLUĆA, ACCESS SUPINE ZA DOJKE I ACCESS SUPINE ZA DOJKE I PLUĆA, BEZ REŠETKE

Access Supine se koristi za pomoć u pozicioniranju i postavljanju pacijenata podvrgnutih radioterapiji dojke i pluća.

2. ACCESS SUPINE ZA MR ZA DOJKE I PLUĆA

Access Supine za MR (obojeno bijelo) funkcionira jednako kao i Access Supine, ali se može koristiti uz snimanje magnetskom rezonancijom.

3. OSOLONAC ZA RUKU

Oslonci za ruku imaju puni raspon prilagodbe kako bi točno pozicionirali gornji dio pacijentovih ruku tijekom simulacije i liječenja.

4. OSOLONAC ZA ZAPEŠĆE

Oslonci za zapešća prilagođavaju se kako bi podupirali zapešća pacijenta tijekom simulacije i liječenja.

5. NASLON ZA GLAVU

Uključeni naslon za glavu može se postaviti na različita mjesta (označeno brojevima od 1 do 28) na proizvodu Access Supine. Dostupni su dodatni nasloni za glavu, uključujući velike i male naslone za glavu s gelom i naslon za glavu TIMO B.

6. DONJI GRANIČNIK

Priloženi donji graničnik koji se može indeksirati održava pravilno pozicioniranje pacijenta tako što sprječava pomicanje pacijenta prema dolje niz Access Supine.

7. LJESTVE POD KUTOM

Ljestve pod kutom omogućuju da se glava i torzo pacijenta postave okomito pod kutom od 0, 5, 7,5, 10, 12,5 i 15 stupnjeva. Dodatne ljestve omogućuju da se glava i torzo pacijenta postave okomito pod kutom od 20 ili 25 stupnjeva.

8. POSTOLJE STOLA

Postolje stola pruža točke pričvršćivanja za ljestve pod kutom i donji graničnik te omogućuje sigurno pričvršćivanje na stol za simulaciju ili terapiju.

9. POVRŠINA ZA PACIJENTA

Površina za pacijenta je dio proizvoda koji se prilagođava između pod 0 do 15 stupnjeva za terapiju.

10. ARMSHUTTLE ELITE

ArmShuttle Elite može se koristiti umjesto oslonaca za ruku kako bi se ruka pacijenata pozicionirala tijekom simulacije i liječenja. Obično se koristi zajedno s jastučićem VacQfix™.

11. BLOKADA OTPUŠTANJA

Blokada otpuštanja pričvršćuje površinu za pacijenta na postolje stola.


UPUTE ZA UPORABU

MONTIRANJE


MONTIRANJE PROIZVODA ACCESS SUPINE

1. Umetnite krajeve prečki za određivanje položaja u odgovarajuće indeksacijske utore kompatibilne sa sustavom Varian Exact® na ploči stola ili proizvodu udaljene 700 mm (obično 5 utora) i umetnite prečke za određivanje položaja tako da sjednu na mjesto. (Sl. 1)
2. Postavite Access Supine preko prečke za određivanje položaja tako da se rupe na postolju stola poravnaju s dva klina na prečkama za određivanje položaja. (Sl. 2)
3. Pritisnite Access Supine na prečku za određivanje položaja kako biste zaključali Access Supine na mjesto. (Sl. 3)


! NAPOMENA ! Access Supine može se pomaknuti s obje strane kako bi se tumor približio izocentru prema želji.

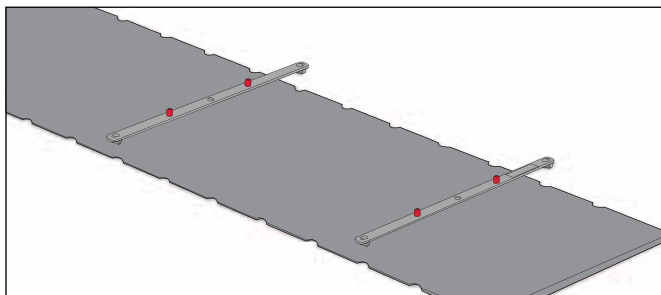

SL. 1

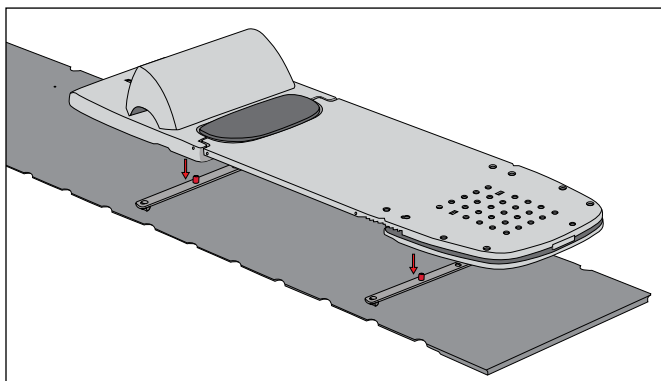

SL. 2

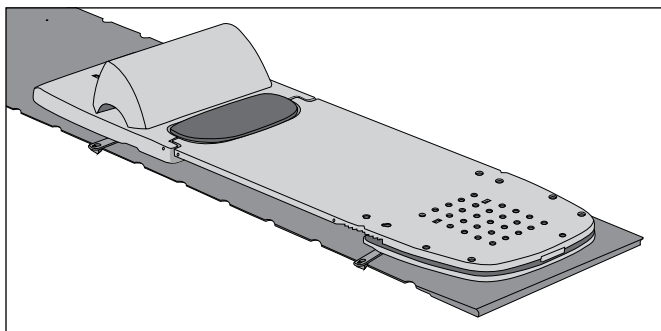

SL. 3

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE

KUT PACIJENTA

! OPREZ ! KADA KORISTITE ACCESS SUPINE POD KUTOM, PROVJERITE JESU LI LJESTVE POD KUTOM PRIČVRŠĆENE ZA GORNJU PLOČU, A CRVENI KRAJEVI VIDLJIVI SU IZNAD PROIZVODA. AKO LJESTVE POD KUTOM NISU PRAVILNO PRIČVRŠĆENE, MOŽE DOĆI DO OZLJEDA PACIJENTA I/ILI OŠTEĆENJA PROIZVODA.

1. Za otključavanje pritisnite blokadu otpuštanja. (Sl. 4)
2. Podignite površinu za pacijenta i podignite ljestve pod kutom na mjesto. (Sl. 5 i 6)
3. Spuštajte površinu za pacijenta dok se ljestve pod kutom ne zaključaju u utore. Nakon zaključavanja crveni krajevi ljestvi pod kutom bit će vidljivi s površine za pacijenta. (Sl. 7)




SL. 4



SL. 5



SL. 6

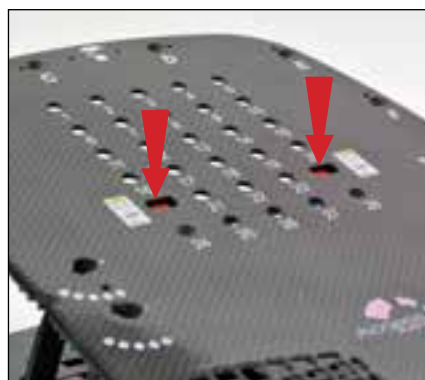

SL. 7


! NAPOMENA ! Kako biste montirali **OPCIONALNE DODATNE** ljestve od 20 ili 25 stupnjeva, umetnite ih u otvorene utore na šarku ljestvi pod kutom. (Sl. 8)




SL. 8

NASLON ZA GLAVU

Naslon za glavu postavite u jedan od dostupnih položaja (1–28) na gornji kraj površine za pacijenta. (Sl. 9 i 10)

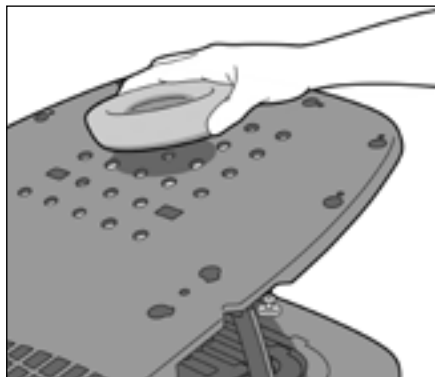

SL. 9

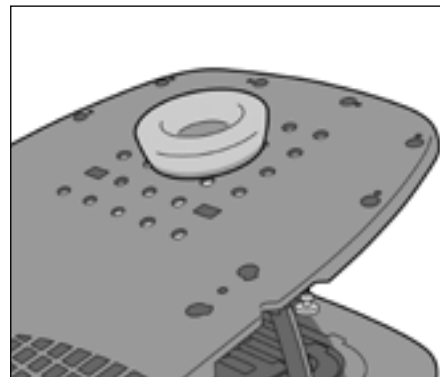

SL. 10

UPUTE ZA UPORABU


NAMJEŠTANJE

OSLONAC ZA RUKU


1. Za pričvršćivanje oslonca za ruku otpustite kotačić i umetnite ga na jedno od dva mjesta (označena s „X” i „Y”). Zategnite kotačić kako biste fiksirali oslonac za ruku na površinu za pacijenta. (Sl. 11)
2. Kako biste podesili rotaciju oslonca za ruku, otpustite kotačić i zakrenite oslonac za ruku na željeno mjesto i zategnite kotačić. (Sl. 12)

! OPREZ ! NEMOJTE PREVIŠE ZATEZATI.


3. Za podešavanje visine popustite pritisak na gumb koji se nalazi na kliznom klizaču za visinu i povucite ga duž kraka, otpuštajući gumb kada dođe u željeni položaj. (Sl. 13)
4. Za podešavanje duljine ruke popustite pritisak na gumb koji se nalazi na kliznom klizaču za duljinu i povucite ga duž kraka, otpuštajući gumb kada dođe u željeni položaj. (Sl. 14)

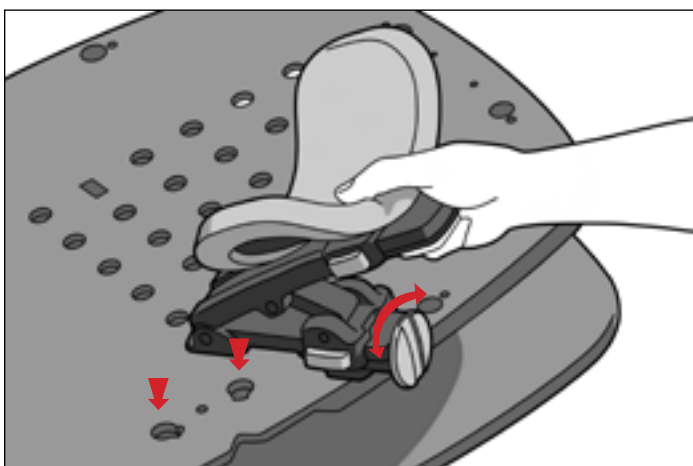


SL. 11

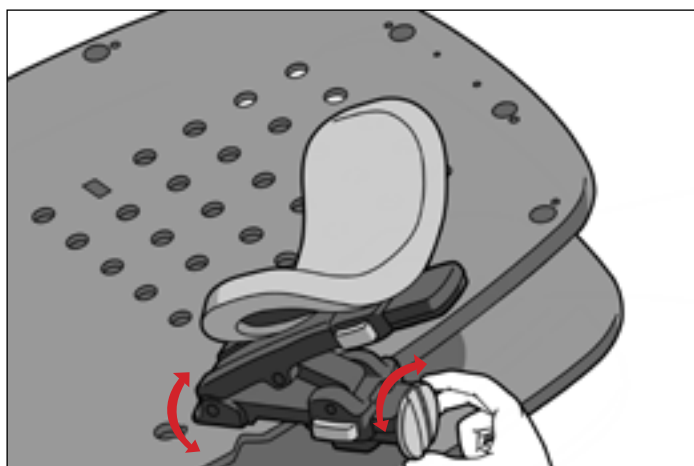

SL. 12

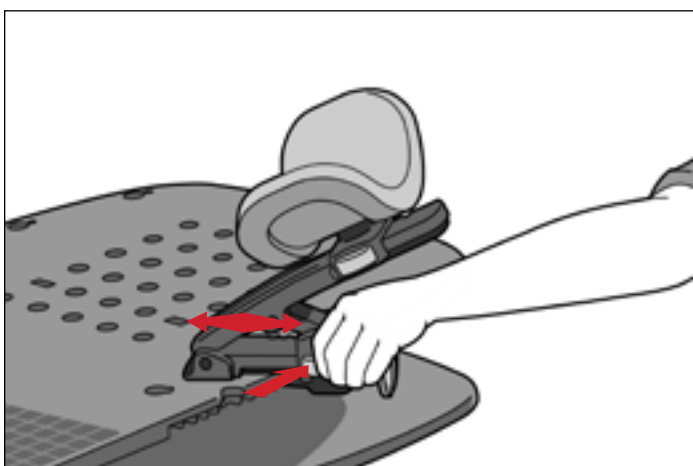

SL. 13

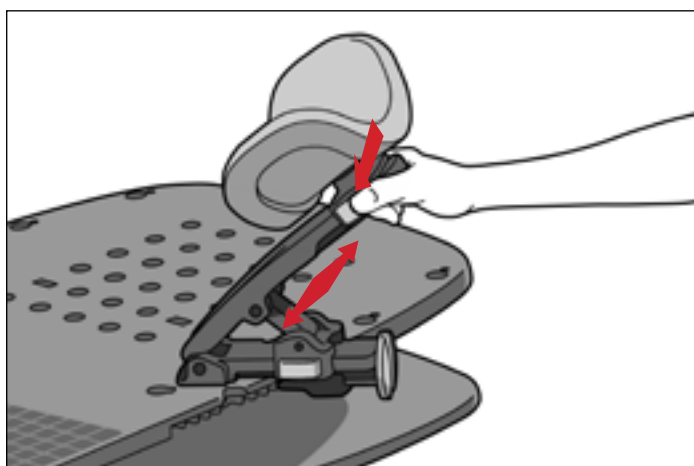


SL. 14

UPUTE ZA UPORABU


NAMJEŠTANJE

OSLONAC ZA ZAPEŠĆE


1. Kako biste pričvrstili oslonac za zapešće, poravnajte oba klina na dnu oslonca za zapešće s dvije odgovarajuće rupe na površini za pacijenta. (Sl. 15)
2. Zatvorite donju polugu kako biste je zaključali na mjestu. (Sl. 16)
3. Kako biste podigli ili spustili čašicu oslonca za zapešće, otvorite gornju polugu. Podignite, spustite ili zakrenite čašicu u željeni položaj i zatvorite gornju polugu. (Sl. 17 i 18)

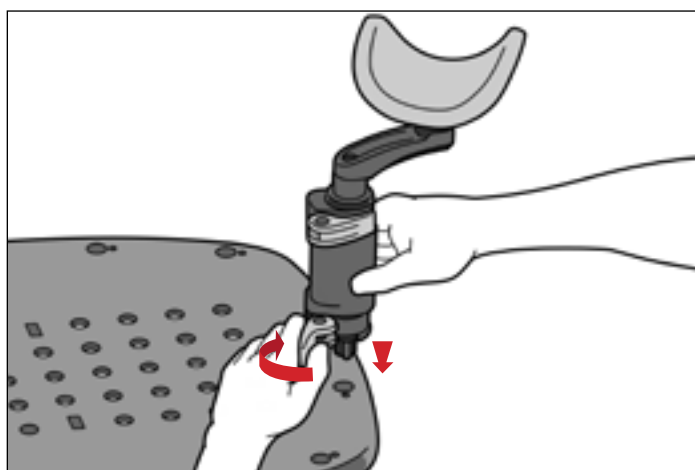


SL. 15

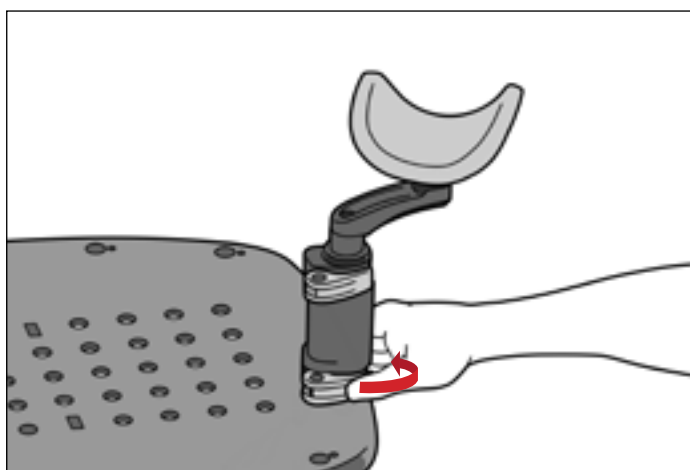

SL. 16

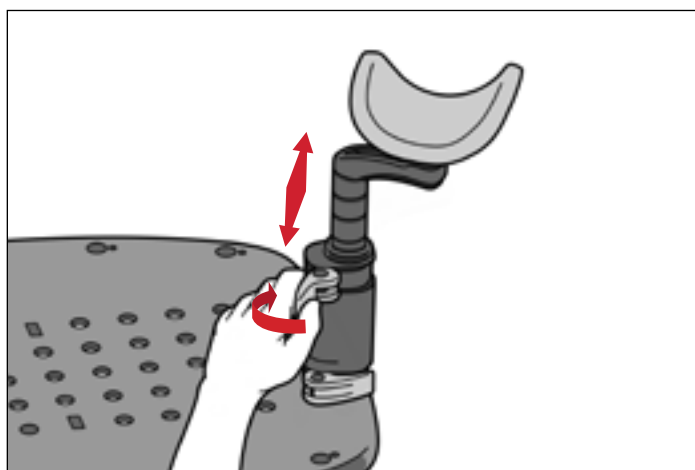

SL. 17

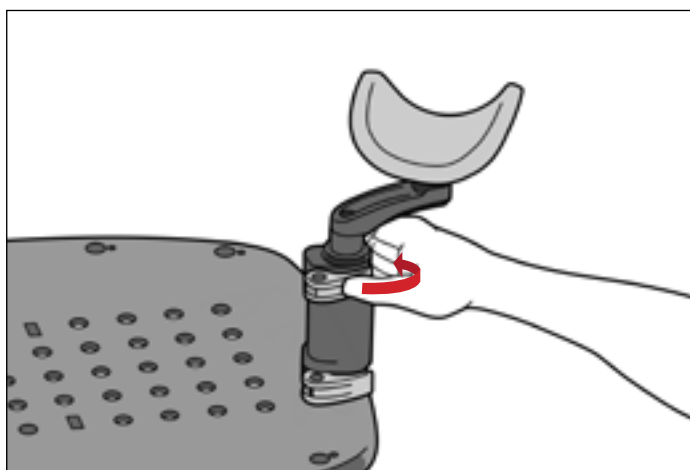

SL. 18

UPUTE ZA UPORABU

NAMJEŠTANJE

DONJI GRANIČNIK

1. Postavite donji graničnik tako da zakrivljena strana bude okrenuta prema površini za pacijenta i umetnite ga u otvor na dnu utora. (Sl. 19)
2. Nakon što se pričvrsti na postolje stola, donji graničnik može se postaviti tako da ga snažno gurnete prema gore (donji graničnik će se zakrenuti u tom smjeru). (Sl. 20)
3. Za pomicanje donjeg graničnika prema dolje, lagano ga podignite i vratite se na željeno mjesto. (Sl. 21)

! NAPOMENA ! Slika 22 prikazuje lokacije indeksiranja za donji graničnik i prečku za određivanje položaja.




SL. 19



SL. 20



SL. 21

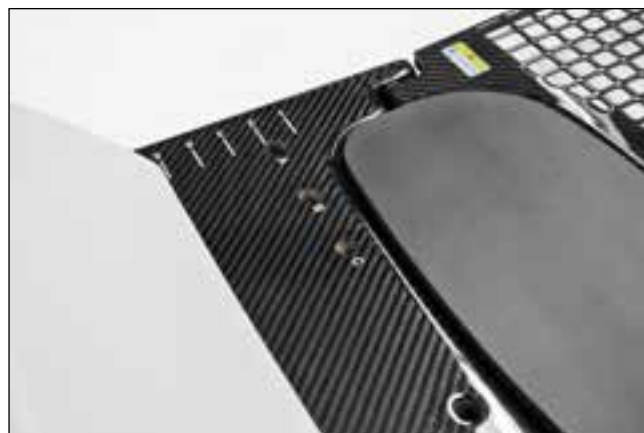

SL. 22

UPUTE ZA UPORABU


NAMJEŠTANJE

ARMSHUTTLE ELITE


! NAPOMENA ! ArmShuttle je alternativa osloncima za ruku i zapešće. Upute za uporabu, značajke proizvoda, specifikacije, upozorenja, mjere opreza i druge opće mjere predostrožnosti u vezi s upotrebom proizvoda ArmShuttle potražite u vodiču i korisničkom priručniku za ArmShuttle (P/N 2004227).

1. Skinite oslonce za ruku otpuštanjem kotačića, zakrenite oslonac za ruku tako da se poravna s utorom na bočnoj strani površine za pacijenta i izvucite oslonac za ruku iz rupa na površini za pacijenta. (Sl. 23)
2. Skinite oslonce za zapešće tako da otvorite donju polugu i izvucete oslonac za zapešće iz rupa na površini za pacijenta. (Sl. 24)
3. Postavite ArmShuttle na vrh proizvoda Access Supine, poravnavajući rupe za kotačić za pričvršćivanje s rupama s navojem koje se nalaze između mjesta oslonca za ruku na proizvodu Access Supine. (Sl. 25)
4. Pričvrstite ArmShuttle pomoću kotačića za pričvršćivanje tako da ih okrenete u smjeru kazaljke na satu dok se ne zategnu. (Sl. 25)


! NAPOMENA ! Slika 26 prikazuje dovršeno postavljanje.

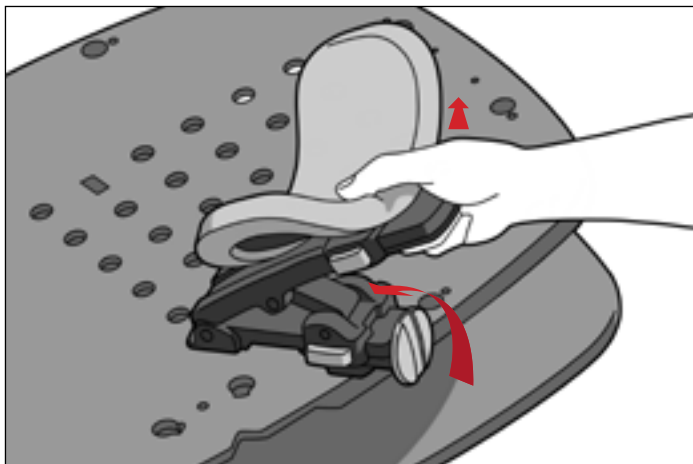

SL. 23

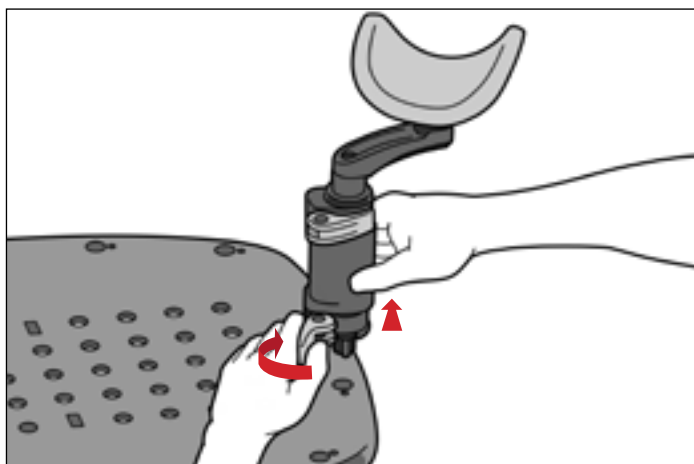

SL. 24

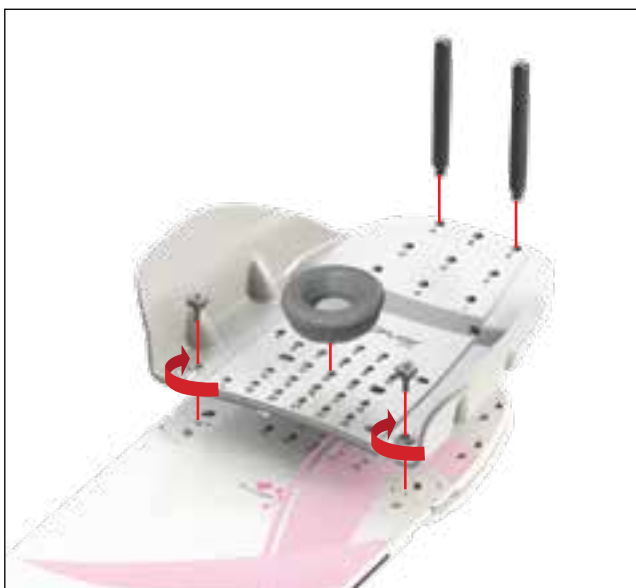

SL. 25



SL. 26

UPUTE ZA UPORABU

UKLANJANJE

ARMSHUTTLE ELITE

1. Skinite kotačiće koji osiguravaju ArmShuttle okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu.
2. Ponovite 1. korak za suprotnu stranu.
3. Podignite ArmShuttle s površine za pacijenta.

DONJI GRANIČNIK

1. Pomaknite donji graničnik prema dolje tako da ga lagano podignite i vratite na mjesto s kojeg ste ga maknuli.
2. Podignite donji graničnik gore iz postolja stola.

OSLONAC ZA RUKU

Otpustite kotačić, zakrenite oslonac za ruku tako da se poravna s utorom na bočnoj strani površine za pacijenta i izvucite oslonac za ruku iz rupa na površini za pacijenta.

OSLONAC ZA ZAPEŠĆE

Otvorite donju polugu i izvucite oslonac za zapešće iz otvora na površini za pacijenta.

NASLON ZA GLAVU

Podignite naslon za glavu dok se ne izvadi iz rupe za određivanje položaja.

ACCESS SUPINE

1. Podignite površinu za pacijenta i spustite ljestve pod kutom sve dok ne budu položene na postolje stola.
2. Spuštajte površinu za pacijenta dok ne čujete da je sjela na mjesto i zaključala se u postolje stola.
3. Podignite Access Supine s prečke za određivanje položaja.
4. Podignite na svakom kraju prečke za određivanje položaja kako biste je skinuli s ploče stola.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SUSTAVA

Uređaj se može očistiti blagom, neabrazivnom otopinom za čišćenje ili dezinfekciju. Nanesite otopinu na čistu krpu i njome obrišite površinu kako biste je očistili. Pregledajte uređaj te, ako nije čist, ponavljajte prethodno navedene korake čišćenja sve dok uređaj ne bude vizualno čist. Čistom krpom navlaženom vodom obrišite uređaj kako biste uklonili sve ostatke sredstva za čišćenje. Za sušenje uređaj obrišite čistom, suhom krpom. Sljedeći su materijali za čišćenje podvrgnuti ispitivanju te je utvrđeno da se mogu upotrebljavati za čišćenje uređaja.

- Voda
- Sapun i voda

DEZINFEKCIJA SUSTAVA

Da biste dezinficirali površinu uređaja, potražite posebne upute proizvođača sredstva za čišćenje.

- 10-postotna otopina izbjeljivača Clorox®
- Izopropilni alkohol
- 2,4-postotna otopina aktiviranog dialdehida Cidex®


Redovito provjeravajte zategnutost svih spojeva.

ODRŽAVANJE


ZAMJENA BOČNE OZNAKE

1. Potpuno uklonite trenutnu bočnu oznaku, uključujući sve ostatke ljepljivosti.
2. Uklonite papir s nove naljepnice.
3. Poravnajte oznaku za poravnanje na sredini bočnog mjerila s registracijskom oznakom na površini za pacijenta i donjim rubom naljepnice neposredno iznad donjeg ruba površine za pacijenta. Nula treba biti namještena pri zaglavlju uređaja. (Sl. 27 i 28)
4. Čvrsto pritisnite cijelu naljepnicu na bočnu stranu proizvoda.
5. Ponovite s drugom stranom, ako je potrebno.

! NAPOMENA ! NE lijepite naljepnicu na promjer površine za pacijenta, što može dovesti do odljepljivanja naljepnice.

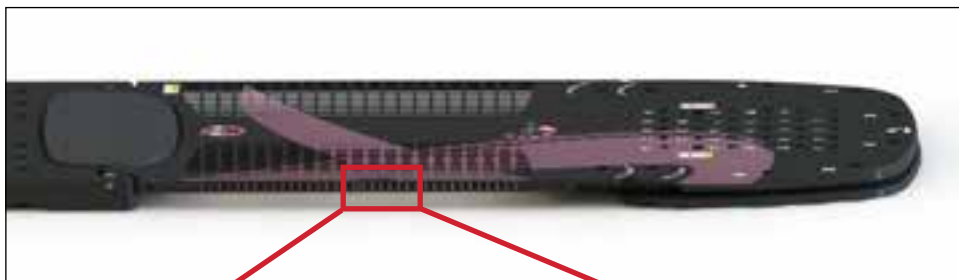

SL. 27

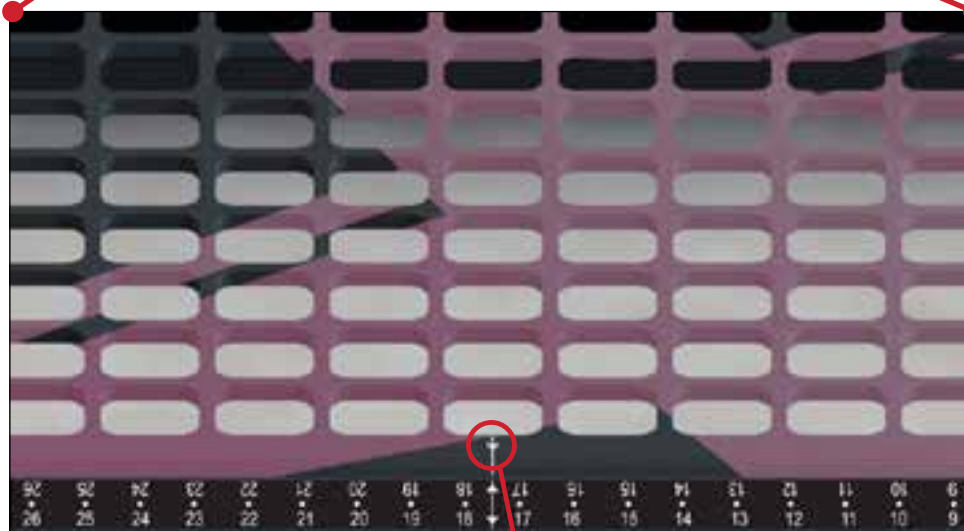

SL. 28

registracijska
oznaka


SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE


Duljina (D): 1374 mm

Ograničenje težine: 249 kg (550 funti) ravnomjerno raspoređenog opterećenja

Ekvivalent vode: *Napomena: Vrijedi samo za RT-4546 – Access™ Supine za dojke i pluća:*
~ 3 mm pri 6 MV u područjima terapije

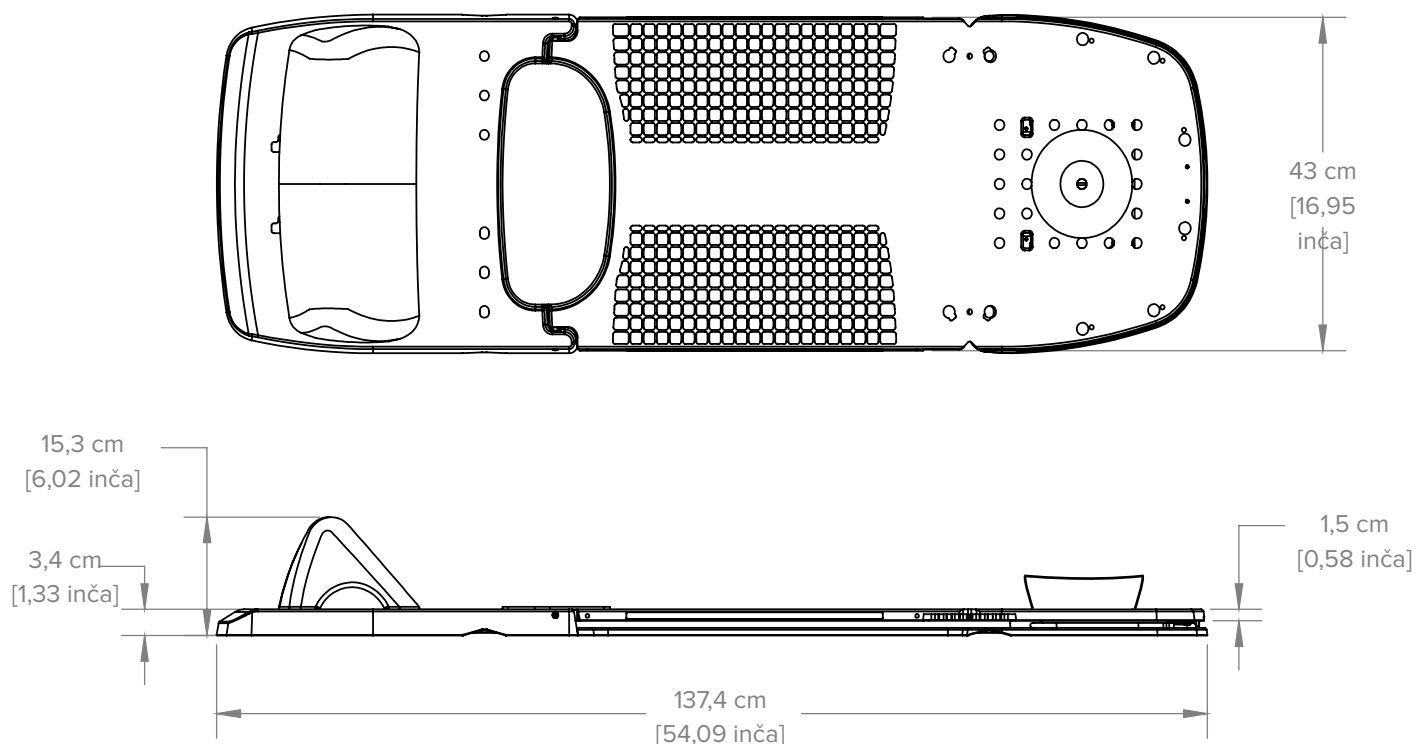

POPIS DIJELOVA

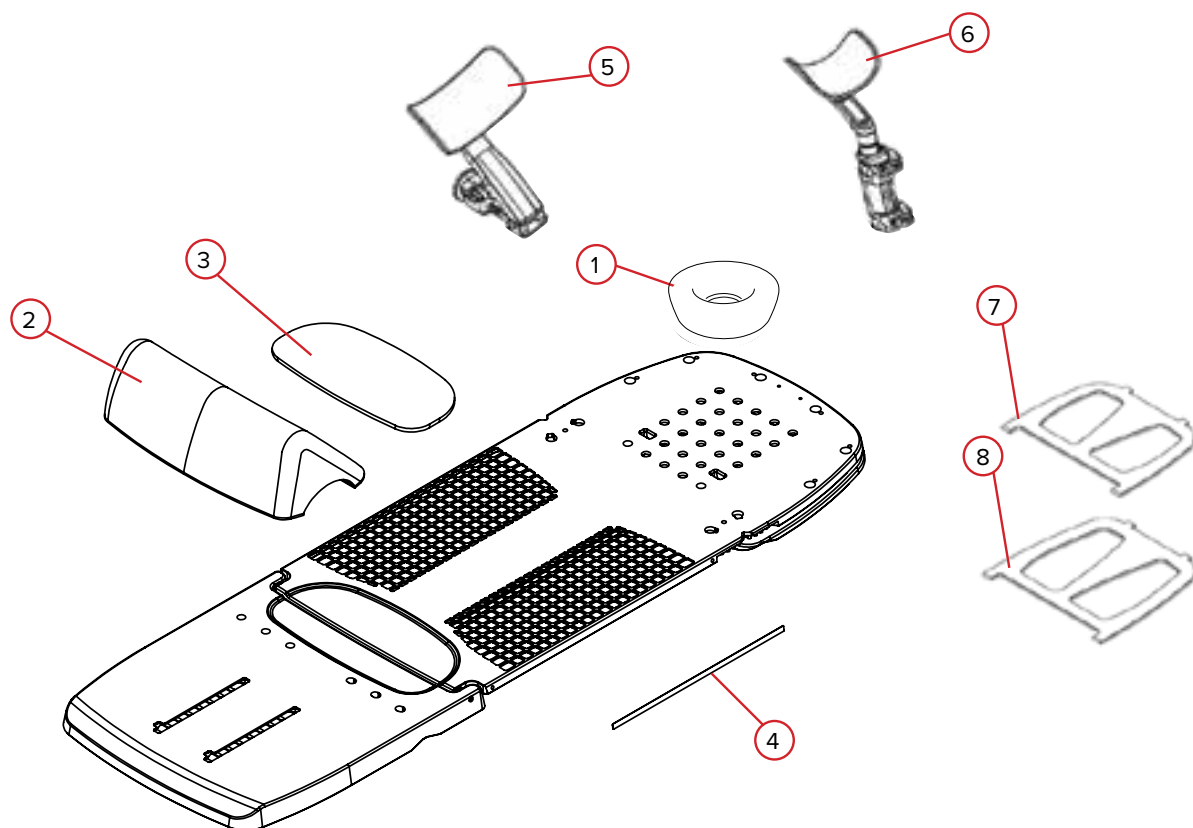

RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01 i RT-4546-02

- 1. RT-4546H – Naslon za glavu od pjene
- 2. 2004034 – Sklop donjeg graničnika od pjene
- 3. 2004047 – Jastučić za trticu
- 4. 2004392 – Bočna oznaka (po 1 za svaku stranu)

RT-4546AA-01

- 5. 2005353 – Jastučić čašice za ruku od pjene za omatanje

RT-4546AW-01

- 6. 2005386 – Jastučić čašice za zapešće od pjene za omatanje

RT-4546L

- 7. 2004121 – Dodatne ljestve od 20 stupnjeva
- 8. 2004122 – Dodatne ljestve od 25 stupnjeva

POPIS NAMJEŠTENIH POSTAVKI

RT-4546: Access Supine za dojke i pluća, RT-4546MRI: Access Supine za MR za dojke i pluća,
RT-4546-01: Access Supine za dojke ili RT-4546-02: Access Supine za dojke i pluća bez rešetke

Ime pacijenta:


Identifikacijski broj pacijenta:

Postavke namjestio/la:

Liječnik:

Datum:

Komentari:

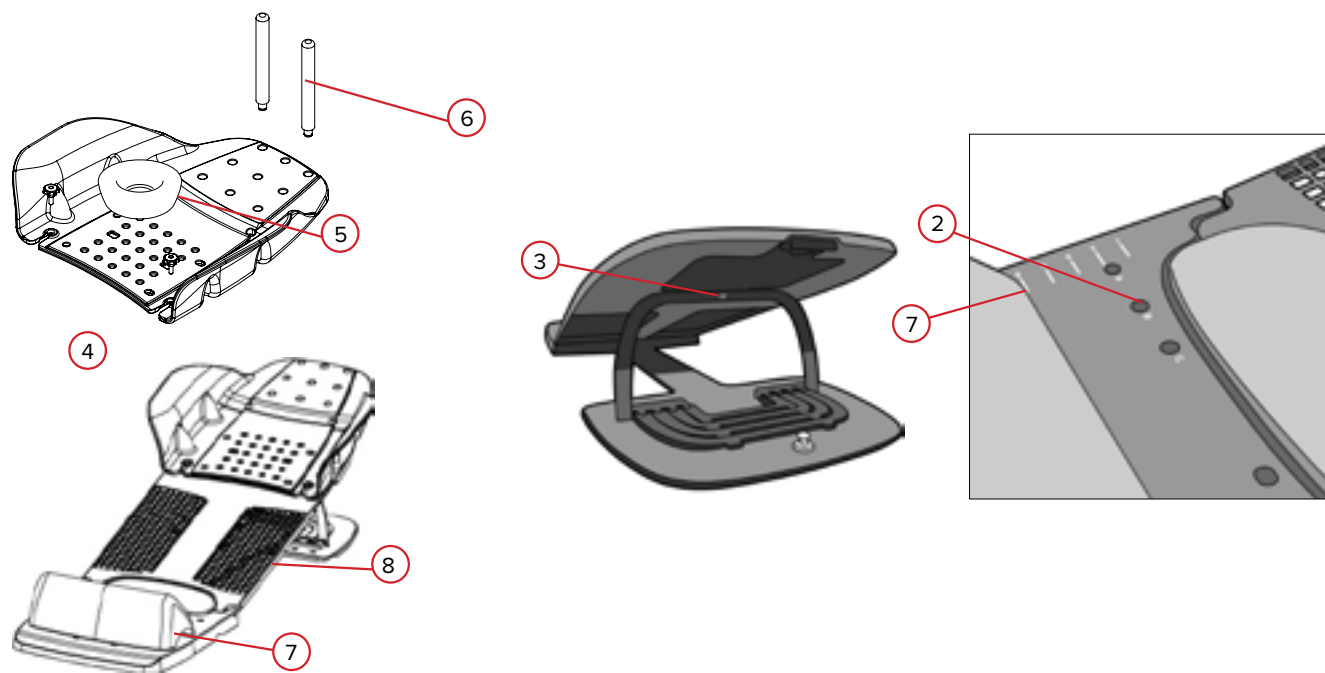

1. Indeksirano na stolu za simulaciju ili terapiju? **Da** **Ne** Ako da, postavka indeksacijskog utora
2. Klin prečke za određivanje položaja (odaberite jedno): **A** **B** **C**
3. Kut površine za pacijenta (odaberite jedno): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Koristi se sa proizvodom ArmShuttle: **Da** **Ne**
5. Mjesto naslona za glavu (broj 1–28):
6. Lokacija rukohvata (odaberite korištene)
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | NIJEDAN NIJE KORIŠTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
7. Koristi li se donji graničnik? **Da** **Ne** Ako da, koja je postavka? (broj 1–8)
8. Lokacija bočne oznake lasera:

POPIŠ NAMJEŠTENIH POSTAVKI

RT-4546: Access Supine za dojke i pluća, RT-4546MRI: Access Supine za MR za dojke i pluća,
RT-4546-01: Access Supine za dojke ili RT-4546-02: Access Supine za dojke i pluća bez rešetke

Ime pacijenta:

Identifikacijski broj pacijenta:

Postavke namjestio/la:

Liječnik:

Datum:

Komentari:



- Indeksirano na stolu za simulaciju ili terapiju? **Da** **Ne** Ako da, postavka indeksacijskog utora
- Klin prečke za određivanje položaja (odaberite jedno): **A** **B** **C**
- Kut površine za pacijenta (odaberite jedno): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Lokacija i kut oslonca za ruku (odaberite jedno)—
pacijentova lijeva strana: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Pacijentova desna strana: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Visina oslonca za ruku (broj 1–8): Pacijentova lijeva strana Pacijentova desna strana
- Duljina oslonca za ruku (odaberite jedno): Pacijentova lijeva strana: **A** **B** **C** Pacijentova desna strana: **A** **B** **C**
- Lokacija oslonca za zapešće (slovo od A do H): Pacijentova lijeva strana Pacijentova desna strana
- Kut oslonca za zapešća:
Pacijentova lijeva strana: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Pacijentova desna strana: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Visina oslonca za zapešća (slova od W do Z): Pacijentova lijeva strana Pacijentova desna strana



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com