



PANDUAN PRODUK & BUKU PANDUAN PENGGUNA

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01, & RT-4546-02

Perangkat Payudara & Paru-Paru Access™ Supine

Perangkat MR Payudara & Paru-Paru Access™ Supine

Perangkat Payudara Access™ Supine

Perangkat Payudara & Paru-Paru Tanpa-Kisi

Access™ Supine



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Exact® adalah merek dagang terdaftar dari Varian Medical Systems.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix, dan ArmShuttle Elite adalah merek dagang dari Qfix.

Cidex® adalah merek dagang terdaftar dari Johnson & Johnson.

Clorox® adalah merek dagang terdaftar dari The Clorox Company.

! CATATAN ! Di seluruh Petunjuk Penggunaan ini, “Access Supine” merujuk pada semua Perangkat Access™ Supine, termasuk Perangkat Payudara & Paru-Paru Access™ Supine, Perangkat MR Payudara & Paru-Paru Access Supine, dan Perangkat Payudara Access™ Supine, kecuali dinyatakan lain.

TINDAKAN PENCEGAHAN UMUM

PERNYATAAN PERINGATAN

! PERINGATAN ! PERALATAN INI TIDAK BOLEH DIMODIFIKASI. JIKA BAGIAN APA PUN DARI PERANGKAT INI MENGALAMI BEBAN BERLEBIHAN, TERLIHAT RUSAK, ATAU TIDAK BERFUNGSI DENGAN BENAR, SEGERA HENTIKAN PENGGUNAAN DAN HUBUNGI CQ MEDICAL DI +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ATAU SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! PERINGATAN ! PASTIKAN TANGGA SUDUT TELAH TERPASANG DENGAN AMAN PADA ALUR DI SEPANJANG ENGSEL SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT. MENGABAIKAN HAL INI DAPAT MERUSAK PERANGKAT ATAU MENYEBABKAN CEDERA.


! PERINGATAN ! JANGAN PERNAH MENGANGKAT ATAU MENURUNKAN TANGGA SAAT PASIEN BERADA DI ATAS PERANGKAT.

! PERINGATAN ! JANGAN PERNAH MENGANGKAT ATAU MEMBAWA PERANGKAT DENGAN MEMEGANG PENYANGGA LENGAN ATAU PERGELANGAN TANGAN.

! PERINGATAN ! JANGAN BIARKAN PASIEN MENYESUAIKAN POSISINYA MENGGUNAKAN PEGANGAN ARMSHUTTLE.

! PERINGATAN ! JANGAN BIARKAN PASIEN MENYESUAIKAN POSISINYA MENGGUNAKAN PENYANGGA LENGAN DAN PERGELANGAN TANGAN.

! PERINGATAN ! JANGAN GUNAKAN ARMSHUTTLE UNTUK MENYESUAIKAN SUDUT PERMUKAAN PASIEN.

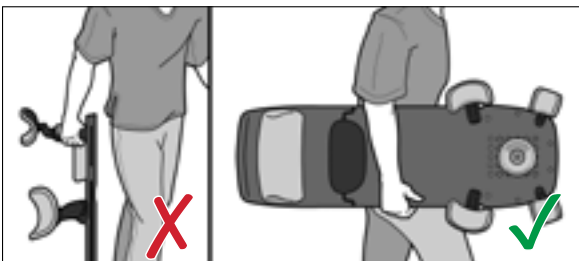

KEJADIAN SERIUS

Harap laporkan kejadian serius apa pun (misalnya, kejadian yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kematian atau cedera serius) baik kepada CQ Medical maupun Pihak Berwenang di negara Anda.

ZONA TERJEPIT

- Zona terjepit dapat terjadi ketika menyesuaikan ketinggian Penyangga Lengan atau Penyangga Pergelangan Tangan.
- Zona terjepit dapat terjadi ketika menyesuaikan sudut Penyangga Lengan atau Penyangga Pergelangan Tangan.
- Zona terjepit dapat terjadi di dalam engsel antara Permukaan Pasien dan Pelat Alas.

TINDAKAN PENCEGAHAN UMUM

ATENUASI BERKAS SINAR PERAWATAN

Access Supine dirancang agar pasien dapat diposisikan sedemikian rupa hingga sebagian besar bidang perawatan posteroanterior (PA) dapat diatur dengan berkas sinar yang melewati bagian bukaan paru-paru perangkat. Area struktural Access Supine memiliki ekuivalensi air sebesar 5 mm pada 6 MV. Perawatan melalui meja perawatan akan meningkatkan atenuasi ini. Atenuasi aktual berdasarkan penyiapan harus diverifikasi dengan peralatan khusus. Perawatan melalui perangkat apa pun, bahkan yang terbuat dari bahan komposit akan menyebabkan peningkatan dosis kulit.

INFORMASI KESELAMATAN MRI

 **Tangga aksesori opsional 20 derajat dan 25 derajat bersifat MR Aman.**

Pengujian nonklinis telah menunjukkan bahwa **tingga aksesori opsional 20 derajat dan 25 derajat** dapat digunakan pada sistem MR yang memenuhi kondisi berikut:

- **Tangga harus digunakan bersama versi MR Aman dari Access Supine (RT-4546MRI) yang diberi label jelas dengan simbol berikut sebelum pemindaian MR:**



 **Penyangga Lengan & Pergelangan Tangan bersifat MR Bersyarat.**

Pengujian nonklinis telah menunjukkan bahwa **Penyangga Lengan dan Pergelangan Tangan** dapat digunakan pada sistem MR yang memenuhi kondisi berikut:

- **Penyangga Lengan dan Pergelangan Tangan dapat ditempatkan di lubang sistem MR yang memiliki Medan magnet statis sebesar 1,5 T atau kurang.**
- **Penyangga Lengan dan Pergelangan Tangan harus digunakan bersama versi MR Aman dari Access Supine (RT-4546MRI) sesuai dengan tujuan penggunaannya sebelum pemindaian.**
- **Versi MR Aman dari Access Supine (RT-4546MRI) diberi label yang jelas dengan simbol berikut:**



 **Penahan Pantat bersifat MR Bersyarat.**

Pengujian nonklinis telah menunjukkan bahwa **Penahan Pantat** dapat digunakan pada sistem MR yang memenuhi kondisi berikut:

- **Penahan Pantat dapat ditempatkan di lubang sistem MR yang memiliki Medan magnet statis sebesar 1,5 T atau kurang.**
- **Penahan Pantat harus digunakan bersama versi MR Aman dari Access Supine (RT-4546MRI) sesuai dengan tujuan penggunaannya sebelum pemindaian.**
- **Versi MR Aman dari Access Supine (RT-4546MRI) diberi label yang jelas dengan simbol berikut:**



TINDAKAN PENCEGAHAN UMUM


LABEL PERINGATAN & DESKRIPSI

Lihat CQmedical.com untuk daftar simbol dan definisinya.



PERINGKAT BEBAN

JANGAN melebihi beban terdistribusi merata 249 kg (550 lb) atau beban kerja aman maksimum dari Sisipan kVue, atau alas dipan, mana pun yang lebih kecil.

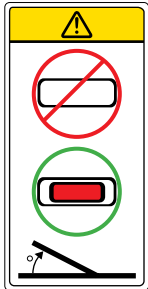

PERINGATAN TERKAIT TANGGA

Ketika menggunakan Access Supine pada suatu sudut, pastikan tangga terkunci dengan aman pada tempatnya dan ujung-ujung merah dari tangga terlihat dari bagian atas perangkat.

Menggunakan Access Supine pada suatu sudut tanpa mengunci tangga dengan benar pada tempatnya dapat merusak perangkat atau menyebabkan cedera.



MR AMAN

Item yang tidak menimbulkan bahaya yang diketahui akibat paparan terhadap lingkungan MR. Item MR Aman tersusun dari bahan yang nonkonduktif, nonlogam, dan nonmagnetik secara elektrik.

! CATATAN ! UNTUK RT-4546MRI SAJA.

TUJUAN PENGGUNAAN

Perangkat ini ditujukan untuk mencegah pergerakan, memosisikan, dan memosisikan ulang pasien yang sedang menjalani terapi radiasi.

! CATATAN ! Undang-undang federal Amerika Serikat membatasi penjualan perangkat ini hanya oleh atau atas perintah dokter.

KELOMPOK SASARAN PASIEN

Pasien yang sedang menjalani terapi radiasi atau prosedur pencitraan diagnostik.

PENGGUNA YANG DITUJU

Pengguna yang dituju untuk produk ini adalah orang yang berkualifikasi berdasarkan persyaratan di wilayah regulasi.




FITUR

DESKRIPSI

Access Supine harus digunakan dengan 2 Bilah Pengaturan Lokasi dua pin, seperti RT-4551BAR, untuk pemasangan yang kencang ke bagian atas dipan simulasi atau perawatan. Bilah Pengaturan Lokasi ini tidak disertakan dengan Access Supine, dan harus dibeli secara terpisah dari produsen dipan.

Access Supine menggunakan Penyangga Lengan (RT-4546AA-01) dan Penyangga Pergelangan Tangan (RT-4546AW-01) opsional untuk menahan lengan atas dan pergelangan tangan pada posisi yang dapat direproduksi. ArmShuttle™ (RT-4546C) opsional dapat digunakan sebagai pengganti Penyangga Lengan dan Pergelangan Tangan.

KOMPONEN

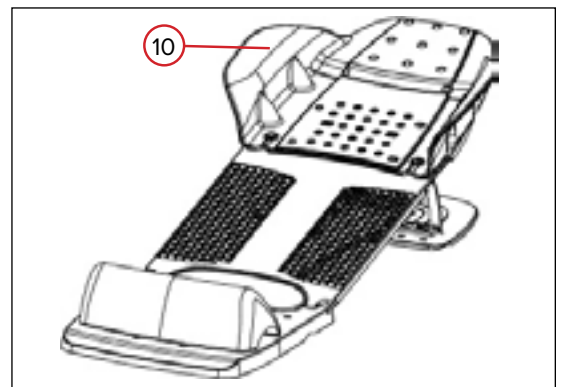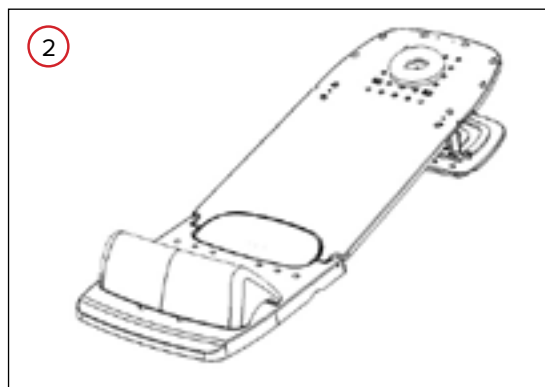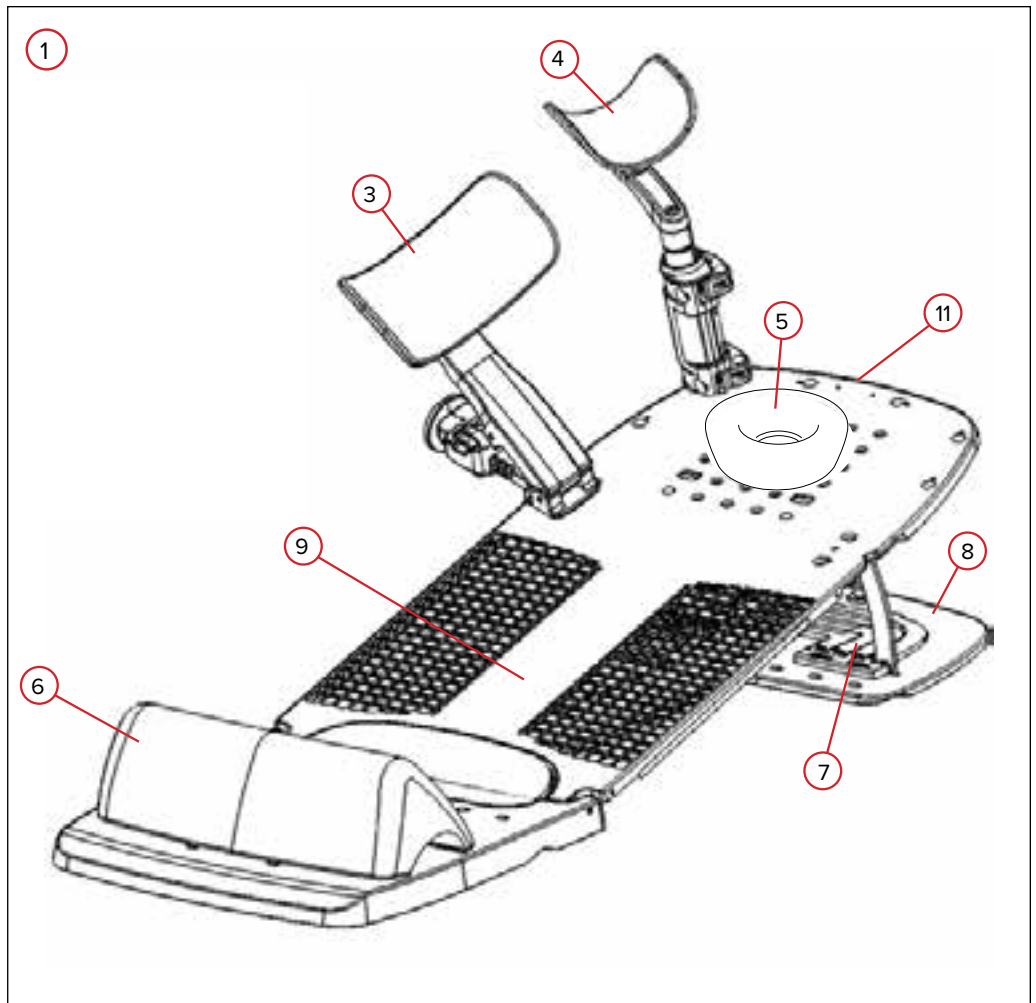

FITUR

KOMPONEN

1. PERANGKAT PAYUDARA & PARU-PARU ACCESS SUPINE, PERANGKAT PAYUDARA ACCESS SUPINE, DAN PERANGKAT PAYUDARA & PARU-PARU TANPA-KISI ACCESS SUPINE

Access Supine digunakan untuk membantu pemosisian dan penyiapan pasien yang sedang menjalani radioterapi payudara dan paru-paru.

2. PERANGKAT MR PAYUDARA & PARU-PARU ACCESS SUPINE

MR Access Supine (dicat putih) memiliki fungsi yang sama dengan Access Supine, tetapi dapat digunakan dengan MRI.

3. PENYANGGA LENGAN

Penyangga Lengan memiliki berbagai macam penyesuaian untuk memosisikan bagian atas lengan pasien secara akurat selama simulasi dan perawatan.

4. PENYANGGA PERGELANGAN TANGAN

Penyangga Pergelangan Tangan disesuaikan untuk menyangga pergelangan tangan pasien selama simulasi dan perawatan.

5. SANDARAN KEPALA

Sandaran kepala yang disediakan dapat diposisikan di berbagai lokasi (diberi label 1 hingga 28) pada Access Supine. Sandaran kepala opsional tersedia, termasuk Sandaran Kepala Gel besar dan kecil, serta Sandaran Kepala TIMO B.

6. PENAHAN PANTAT

Penahan Pantat yang dapat diindeks yang disediakan mempertahankan pemosisian pasien yang benar dengan membantu mencegah pasien merosot dari Access Supine.

7. TANGGA SUDUT

Tangga Sudut memungkinkan kepala dan bagian atas tubuh pasien untuk dimiringkan secara vertikal pada sudut 0, 5, 7,5, 10, 12,5, atau 15 derajat. Tangga aksesori opsional memungkinkan kepala dan bagian atas tubuh pasien untuk dimiringkan secara vertikal pada sudut 20 atau 25 derajat.

8. PELAT ALAS

Pelat Alas menyediakan titik sambungan untuk Tangga Sudut dan Penahan Pantat serta memungkinkan pemasangan yang aman ke dipan simulasi atau perawatan.

9. PERMUKAAN PASIEN

Permukaan Pasien adalah bagian perangkat yang disesuaikan antara 0 hingga 15 derajat untuk perawatan.

10. ARMSHUTTLE ELITE

ArmShuttle Elite dapat digunakan sebagai pengganti Penyangga Lengan untuk memosisikan lengan pasien selama simulasi dan perawatan. Perangkat ini biasanya digunakan bersama dengan Bantal VacQfix™.

11. KUNCI PELEPAS

Kunci pelepas mengencangkan permukaan pasien ke pelat alas.


PETUNJUK PENGOPERASIAN

PEMASANGAN


PEMASANGAN ACCESS SUPINE

1. Masukkan ujung-ujung semua Bilah Pengaturan Lokasi ke dalam takik indeks kompatibel Varian Exact® yang sesuai di bagian atas dipan atau perangkat, dengan jarak 700 mm (biasanya 5 takik), dan kencangkan Bilah Pengaturan Lokasi ke tempatnya. (Gbr. 1)
2. Posisikan Access Supine di atas Bilah Pengaturan Lokasi agar lubang di Pelat Alas sejajar dengan dua pin di Bilah Pengaturan Lokasi. (Gbr. 2)
3. Dorong Access Supine ke bawah pada Bilah Pengaturan Lokasi untuk mengunci Access Supine pada tempatnya. (Gbr. 3)


! CATATAN ! Access Supine dapat disesuaikan posisinya ke salah satu sisi untuk memosisikan tumor lebih dekat ke isosenter sesuai keinginan.

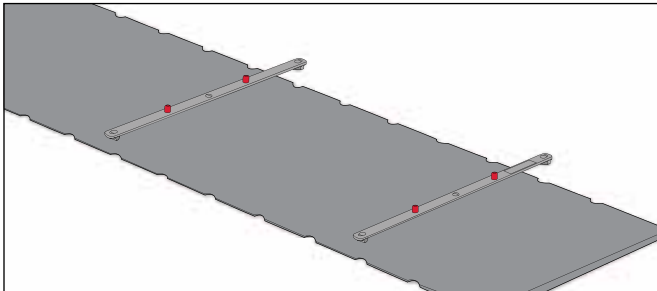

GBR. 1

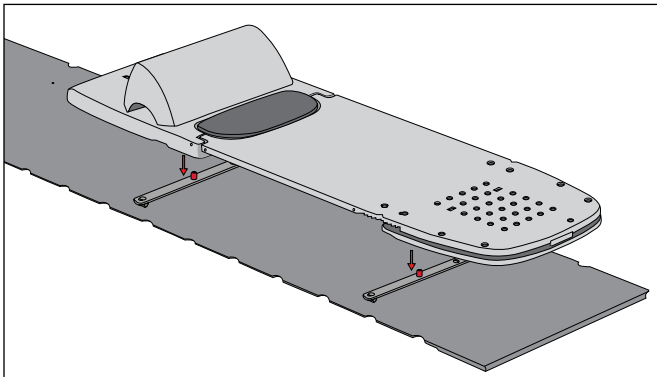

GBR. 2

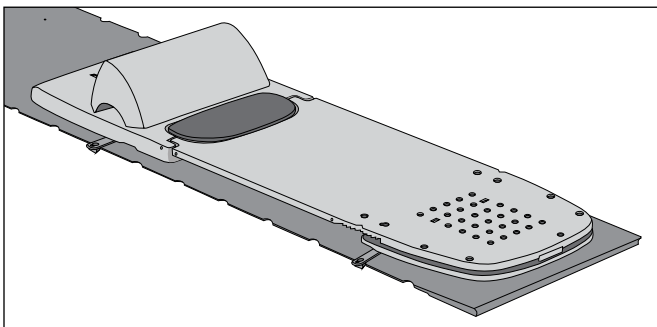

GBR. 3

PETUNJUK PENGOPERASIAN

PENYIAPAN

SUDUT PASIEN

! PERHATIAN ! KETIKA MENGGUNAKAN ACCESS SUPINE PADA SUATU SUDUT, PASTIKAN BAHWA TANGGA SUDUT TELAH TERPASANG DENGAN AMAN KE PANEL ATAS, DAN UJUNG-UJUNG MERAH TERLIHAT DARI ATAS PERANGKAT. JIKA TANGGA SUDUT TIDAK TERPASANG DENGAN BENAR, HAL INI DAPAT MENAKIBATKAN CEDERA PADA PASIEN DAN/ATAU KERUSAKAN PADA PERANGKAT.

1. Tekan Kunci Pelepas ke dalam untuk membuka kunci. (Gbr. 4)
2. Angkat Permukaan Pasien, lalu angkat Tangga Sudut ke tempatnya. (Gbr. 5 & 6)
3. Turunkan Permukaan Pasien hingga Tangga Sudut terkunci ke dalam slot. Setelah terkunci, ujung-ujung merah dari Tangga Sudut akan terlihat dari Permukaan Pasien. (Gbr. 7)




GBR. 4



GBR. 5



GBR. 6

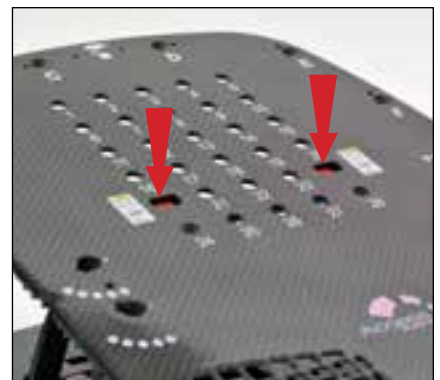

GBR. 7


! CATATAN ! Untuk memasang tangga AKSESORI OPSIONAL 20 atau 25 derajat, masukkan salah satu tangga ke dalam slot terbuka di Engsel Tangga Sudut. (Gbr. 8)




GBR. 8

SANDARAN KEPALA

Pasang Sandaran Kepala di salah satu posisi yang tersedia (1–28) di ujung superior dari Permukaan Pasien. (Gbr. 9 & 10)

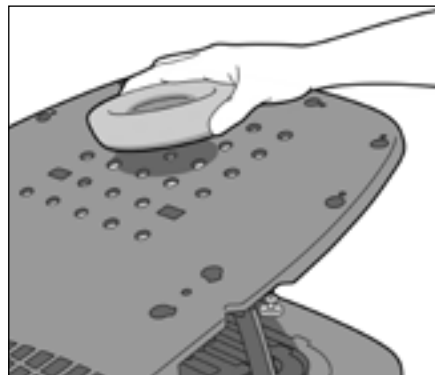

GBR. 9

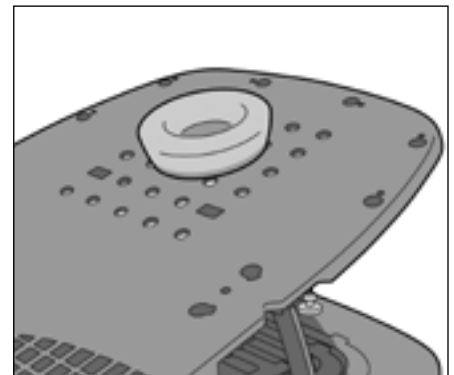

GBR. 10

PETUNJUK PENGOPERASIAN


PENYIAPAN

PENYANGGA LENGAN


1. Untuk memasang Penyangga Lengan, longgarkan kenop dan masukkan ke dalam salah satu dari dua lokasi (ditandai dengan "X" dan "Y"). Kencangkan kenop untuk mengunci Penyangga Lengan pada Permukaan Pasien. (Gbr. 11)
2. Untuk menyesuaikan rotasi Penyangga Lengan, longgarkan kenop dan putar Penyangga Lengan ke lokasi yang diinginkan, lalu kencangkan kenop. (Gbr. 12)

! PERHATIAN ! JANGAN MENGENCANGKAN SECARA BERLEBIHAN.


3. Untuk menyesuaikan ketinggian, tekan tombol yang terletak di penggeser ketinggian dan geser di sepanjang lengan, lepaskan tombol setelah berada di posisi yang diinginkan. (Gbr. 13)
4. Untuk menyesuaikan panjang lengan, tekan tombol yang terletak di penggeser panjang dan geser di sepanjang lengan, lepaskan tombol setelah berada di posisi yang diinginkan. (Gbr. 14)

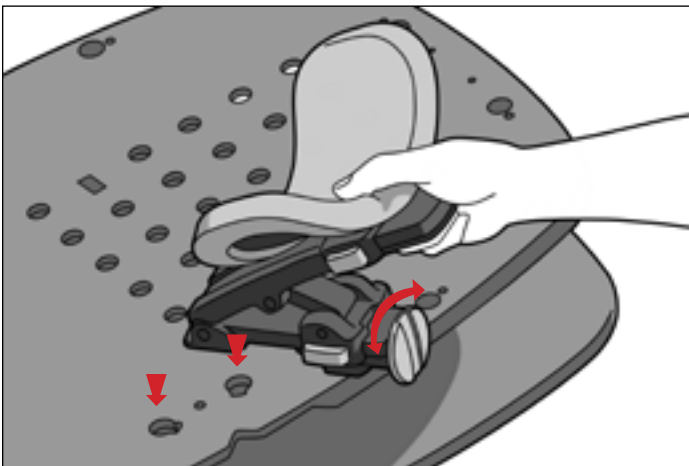


GBR. 11

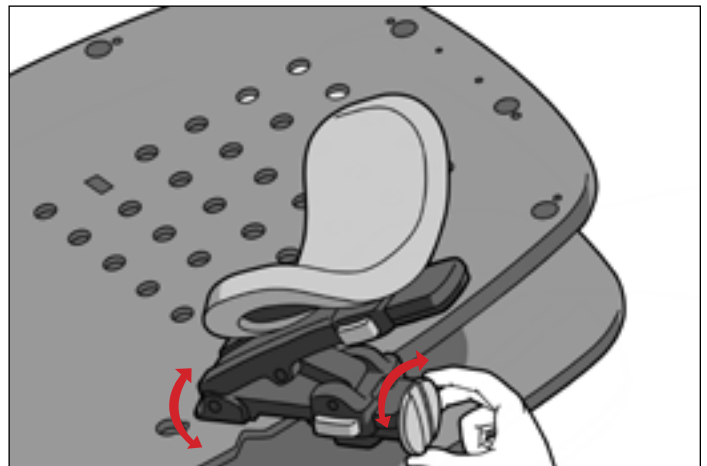

GBR. 12

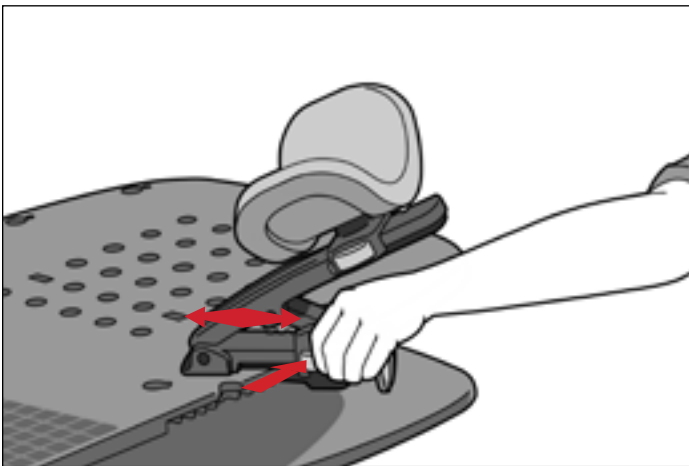

GBR. 13

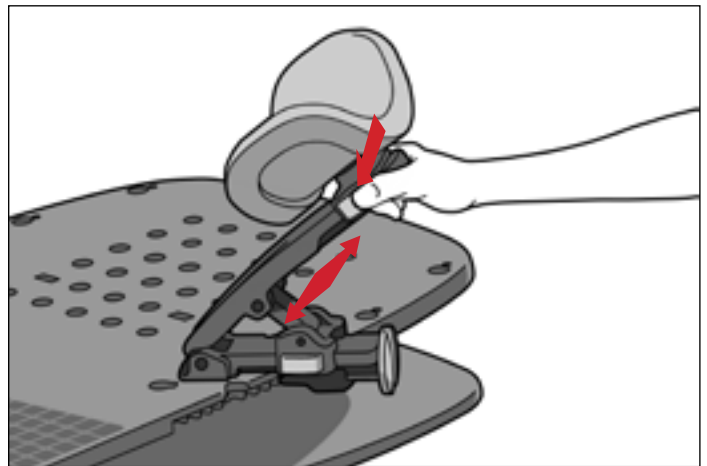


GBR. 14

PETUNJUK PENGOPERASIAN


PENYIAPAN

PENYANGGA PERGELANGAN TANGAN


1. Untuk memasang Penyangga Pergelangan Tangan, sejajarkan kedua pasak di bagian bawah Penyangga Pergelangan Tangan dengan dua lubang yang sesuai di Permukaan Pasien. (Gbr. 15)
2. Tutup tuas bawah untuk mengunci pada tempatnya. (Gbr. 16)
3. Untuk menaikkan atau menurunkan sandaran Penyangga Pergelangan Tangan, buka tuas atas. Naikkan, turunkan, atau putar sandaran ke posisi yang diinginkan dan tutup tuas atas. (Gbr. 17 dan Gbr. 18)

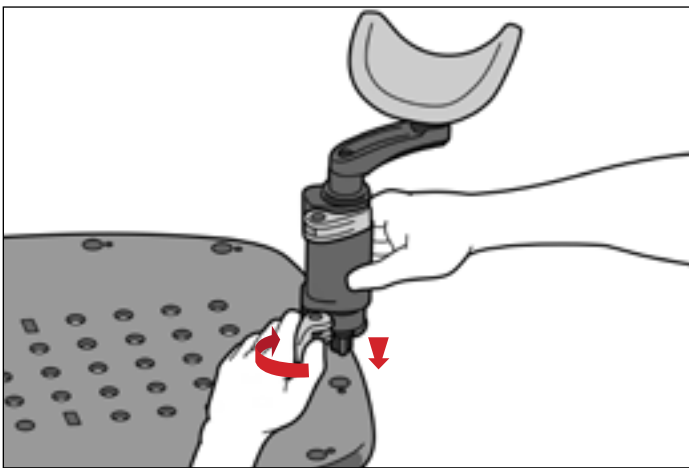


GBR. 15

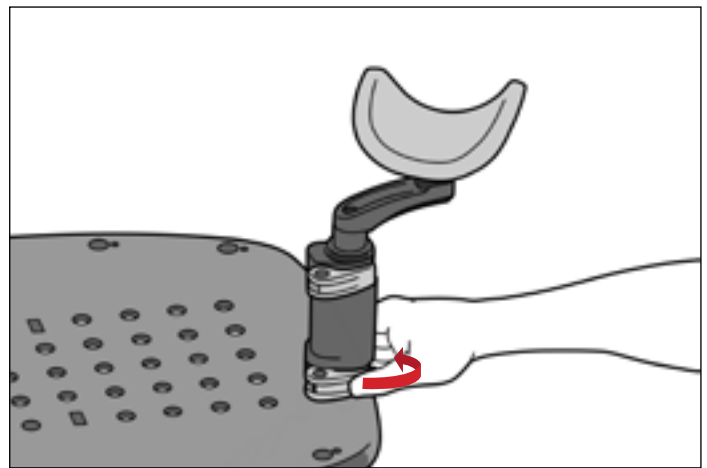

GBR. 16

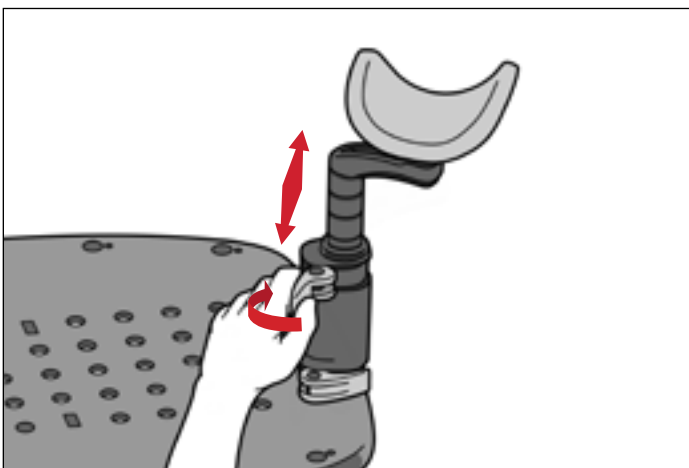

GBR. 17

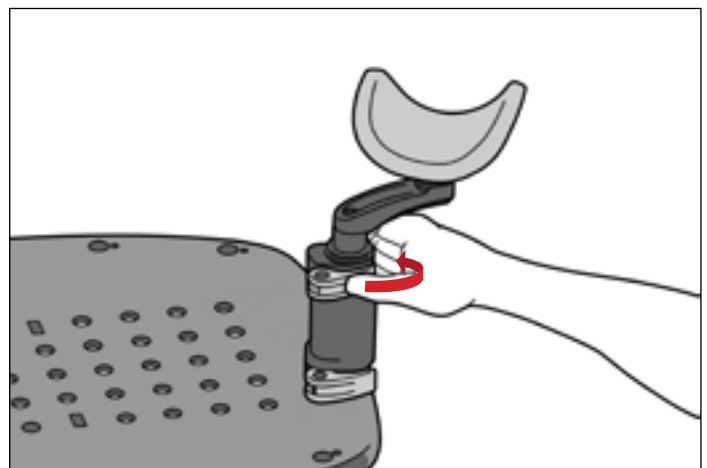

GBR. 18

PETUNJUK PENGOPERASIAN

PENYIAPAN

PENAHAN PANTAT

1. Posisikan Penahan Pantat agar sisi yang melengkung menghadap ke Permukaan Pasien, dan masukkan ke dalam bukaan di bagian bawah slot. (Gbr. 19)
2. Setelah terpasang ke Pelat Alas, Penahan Pantat dapat diposisikan dengan mendorongnya ke arah superior (Penahan Pantat hanya akan bergerak ke arah ini). (Gbr. 20)
3. Untuk memindahkan Penahan Pantat ke arah inferior, angkat ke atas sedikit, dan geser mundur ke lokasi yang diinginkan. (Gbr. 21)

! CATATAN ! Gambar 22 menunjukkan lokasi pengindeksan untuk Penahan Pantat dan Bilah Pengaturan Lokasi.




GBR. 19



GBR. 20



GBR. 21

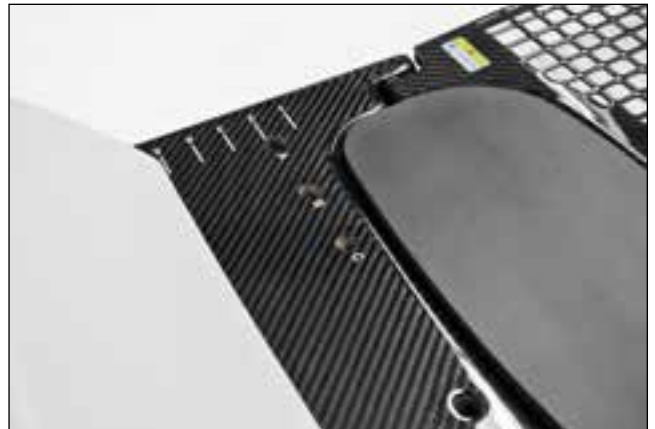

GBR. 22

PETUNJUK PENGOPERASIAN


PENYIAPAN

ARMSHUTTLE ELITE


! CATATAN ! ArmShuttle adalah perangkat alternatif untuk Penyangga Lengan dan Pergelangan Tangan. Lihat Panduan Produk dan Buku Panduan Pengguna untuk ArmShuttle (P/N 2004227) untuk mengetahui petunjuk pengoperasian, fitur produk, spesifikasi, peringatan, perhatian, dan tindakan pencegahan umum lainnya terkait dengan penggunaan ArmShuttle.

1. Lepaskan Penyangga Lengan dengan melonggarkan kenop, memutar Penyangga Lengan agar sejajar dengan takik di bagian samping Permukaan Pasien, dan menarik Penyangga Lengan keluar dari lubang di Permukaan Pasien. (Gbr. 23)
2. Lepaskan Penyangga Pergelangan Tangan dengan membuka tuas bawah dan menarik Penyangga Pergelangan Tangan keluar dari lubang di Permukaan Pasien. (Gbr. 24)
3. Tempatkan ArmShuttle di atas Access Supine, dengan menyejajarkan lubang kenop sambungan dengan lubang berulir yang terletak di antara lokasi Penyangga Lengan pada Access Supine. (Gbr. 25)
4. Kencangkan ArmShuttle dengan kenop sambungan, dengan memutarnya searah jarum jam hingga kencang. (Gbr. 25)


! CATATAN ! Gambar 26 menunjukkan penyiapan yang lengkap.

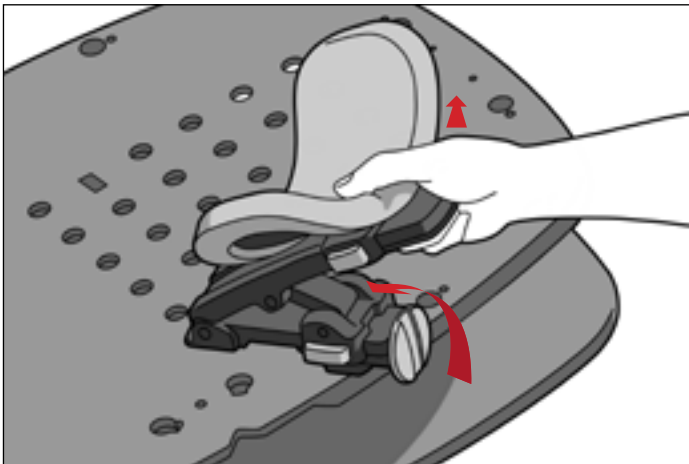

GBR. 23

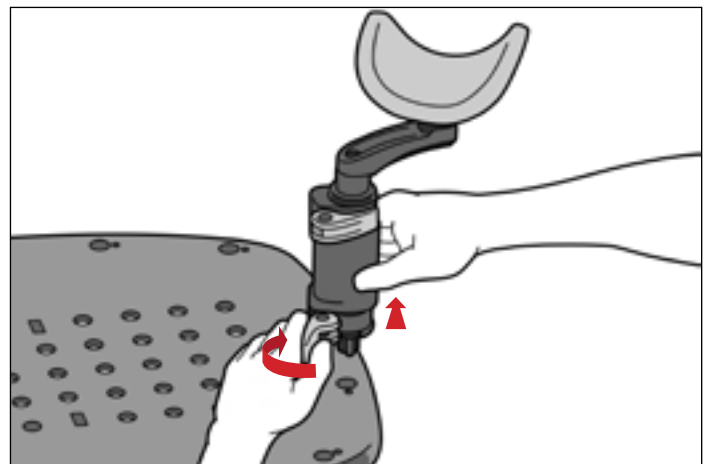

GBR. 24

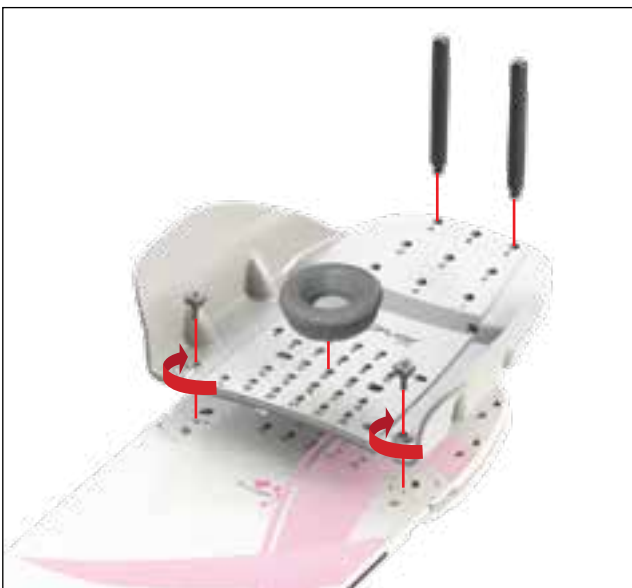

GBR. 25



GBR. 26

PETUNJUK PENGOPERASIAN

PELEPASAN

ARMSHUTTLE ELITE

1. Lepaskan kenop yang menahan ArmShuttle dengan memutar kenop berlawanan arah jarum jam.
2. Ulangi langkah 1 untuk sisi yang berlawanan.
3. Angkat ArmShuttle dari Permukaan Pasien.

PENAHAN PANTAT

1. Pindahkan Penahan Pantat ke arah inferior dengan mengangkat ke atas sedikit, dan menggeser mundur ke lokasi pelepasan.
2. Angkat Penahan Pantat ke atas, keluar dari Pelat Alas.

PENYANGGA LENGAN

Longgarkan kenop, putar Penyangga Lengan agar sejajar dengan takik di bagian samping Permukaan Pasien, dan tarik Penyangga Lengan keluar dari lubang di Permukaan Pasien.

PENYANGGA PERGELANGAN TANGAN

Buka tuas bawah dan tarik Penyangga Pergelangan Tangan keluar dari lubang di Permukaan Pasien.

SANDARAN KEPALA

Angkat sandaran kepala ke atas hingga terlepas dari lubang pengaturan lokasi.

ACCESS SUPINE

1. Angkat Permukaan Pasien, dan turunkan Tangga Sudut hingga rata pada Pelat Alas.
2. Turunkan Permukaan Pasien hingga terdengar bunyi klik mengunci ke Pelat Alas.
3. Angkat Access Supine dari Bilah Pengaturan Lokasi.
4. Angkat setiap ujung Bilah Pengaturan Lokasi ke atas untuk melepaskannya dari bagian atas dipan.

PEMELIHARAAN

MEMBERSIHKAN SISTEM

Perangkat dapat dibersihkan menggunakan larutan pembersih atau disinfektan ringan dan non-abrasif. Basahi kain bersih dengan larutan dan seka permukaan untuk membersihkannya. Amati perangkat untuk memastikan kebersihannya. Jika belum bersih, ulangi langkah pembersihan sebelumnya hingga benar-benar bersih. Gunakan kain bersih yang dibasahi dengan sedikit air untuk menyeka dan membersihkan perangkat dari sisa bahan pembersih. Seka dengan kain bersih dan kering untuk mengeringkan perangkat. Bahan pembersih berikut telah diuji dan dianggap sesuai untuk membersihkan perangkat.

- Air
- Sabun dan Air

MENDISINFEKSI SISTEM

Untuk mendisinfeksi permukaan perangkat, baca petunjuk khusus dari produsen bahan pembersih.

- Larutan Pemutih Clorox® 10%
- Isopropil Alkohol
- Larutan Dialdehida Teraktifkan Cidex® 2,4%


Periksa kekencangan semua pengunci secara berkala.

PEMELIHARAAN


PENGANTIAN PENANDA SAMPING

1. Lepaskan seluruh label penanda samping yang saat ini terpasang, termasuk semua sisa perekat.
2. Kelupas lapisan kertas di belakang label yang baru.
3. Sejajarkan tanda penyelarasan di tengah skala samping dengan tanda registrasi di permukaan pasien, dan tepi bawah label tepat di atas tepi bawah Permukaan Pasien. Angka nol harus diposisikan di ujung kepala perangkat. (Gbr. 27 & 28)
4. Tekan dengan kuat seluruh label pada bagian samping perangkat.
5. Ulangi dengan sisi lainnya, jika perlu.

! CATATAN ! JANGAN tempelkan label ke radius Permukaan Pasien, label dapat menjadi terkelupas.

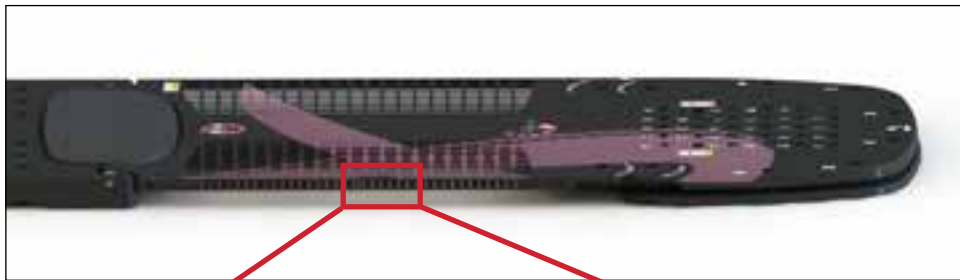

GBR. 27

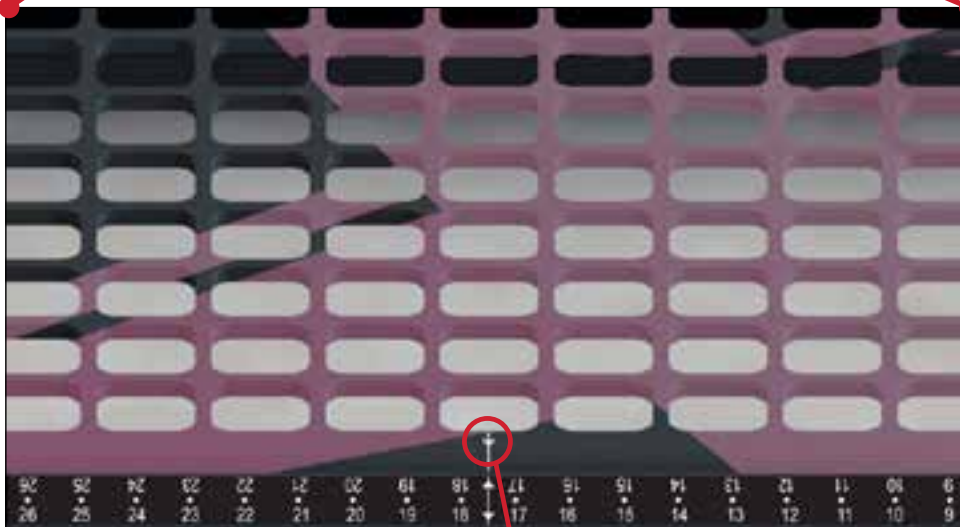

GBR. 28

tanda registrasi


SPESIFIKASI

DIMENSI


Panjang (P): 1.374 mm

Batas Berat: Beban Terdistribusi Merata 249 kg (550 lb)

Ekuivalensi Air: Catatan: Hanya berlaku untuk RT-4546 – Perangkat Payudara dan Paru-Paru Access™ Supine:
~ 3 mm @ 6 MV di area perawatan

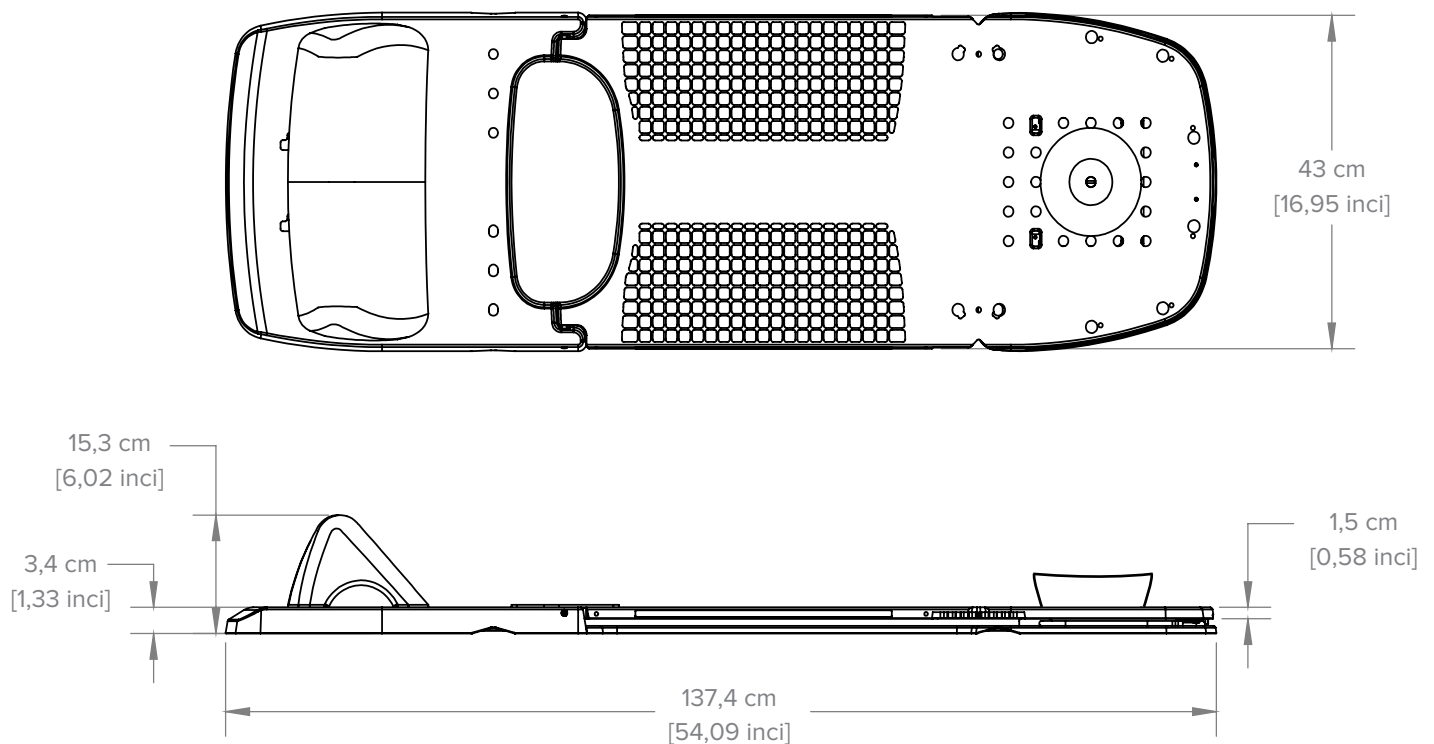

DAFTAR KOMPONEN

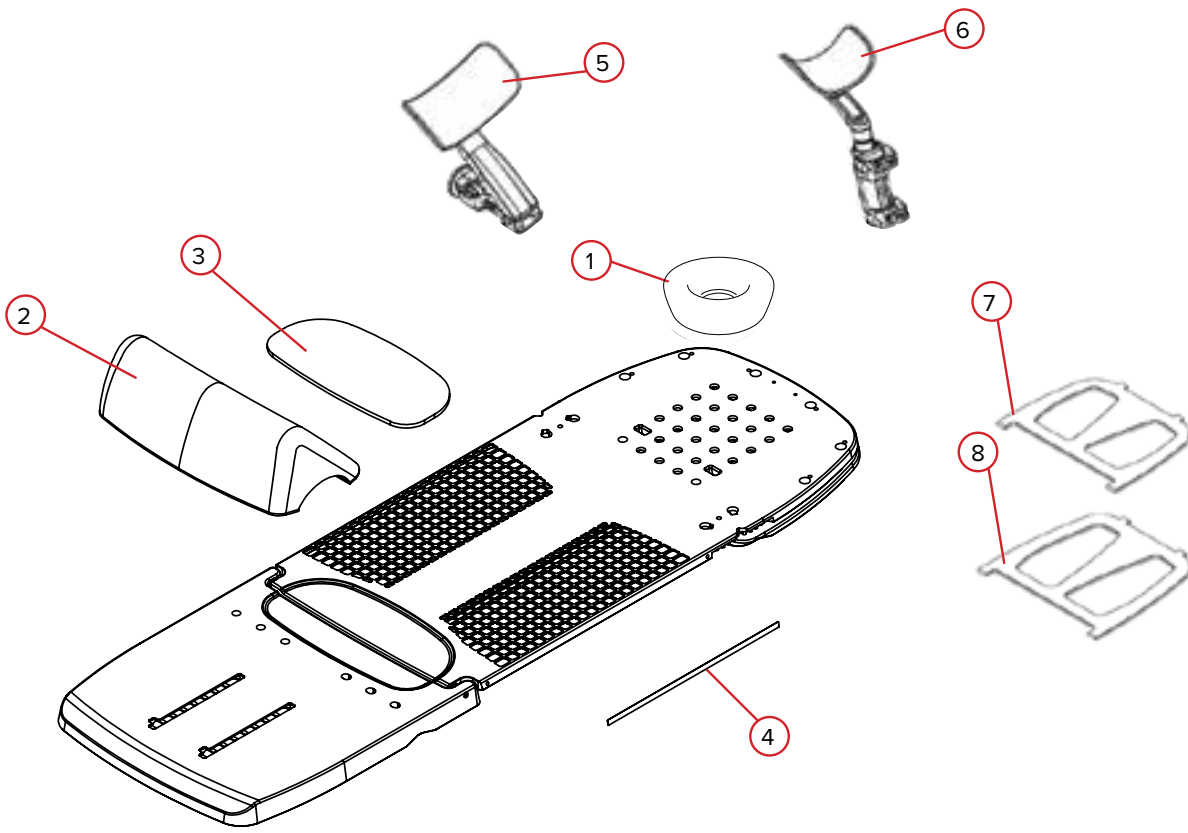

RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01, & RT-4546-02

- 1. RT-4546H – Sandaran Kepala Busa
- 2. 2004034 – Rakitan Busa Penahan Pantat
- 3. 2004047 – Bantalan Tulang Ekor
- 4. 2004392 – Label Penanda Samping (masing-masing 1 buah)

RT-4546AA-01

- 5. 2005353 – Bantalan Busa Sandaran Lengan, melengkung

RT-4546AW-01

- 6. 2005386 – Bantalan Busa Sandaran Pergelangan Tangan, melengkung

RT-4546L

- 7. 2004121 – Tangga Aksesori, 20 derajat
- 8. 2004122 – Tangga Aksesori, 25 derajat

LEMBAR PENYIAPAN

RT-4546: Perangkat Payudara & Paru-Paru Access Supine, RT-4546MRI: Perangkat MR Payudara & Paru-Paru Access Supine,
RT-4546-01: Perangkat Payudara Access Supine, atau RT-4546-02: Perangkat Payudara & Paru-Paru Tanpa-Kisi Access Supine

Nama Pasien:


No. ID Pasien:

Disiapkan oleh:

Dokter:

Tanggal:

Komentar:

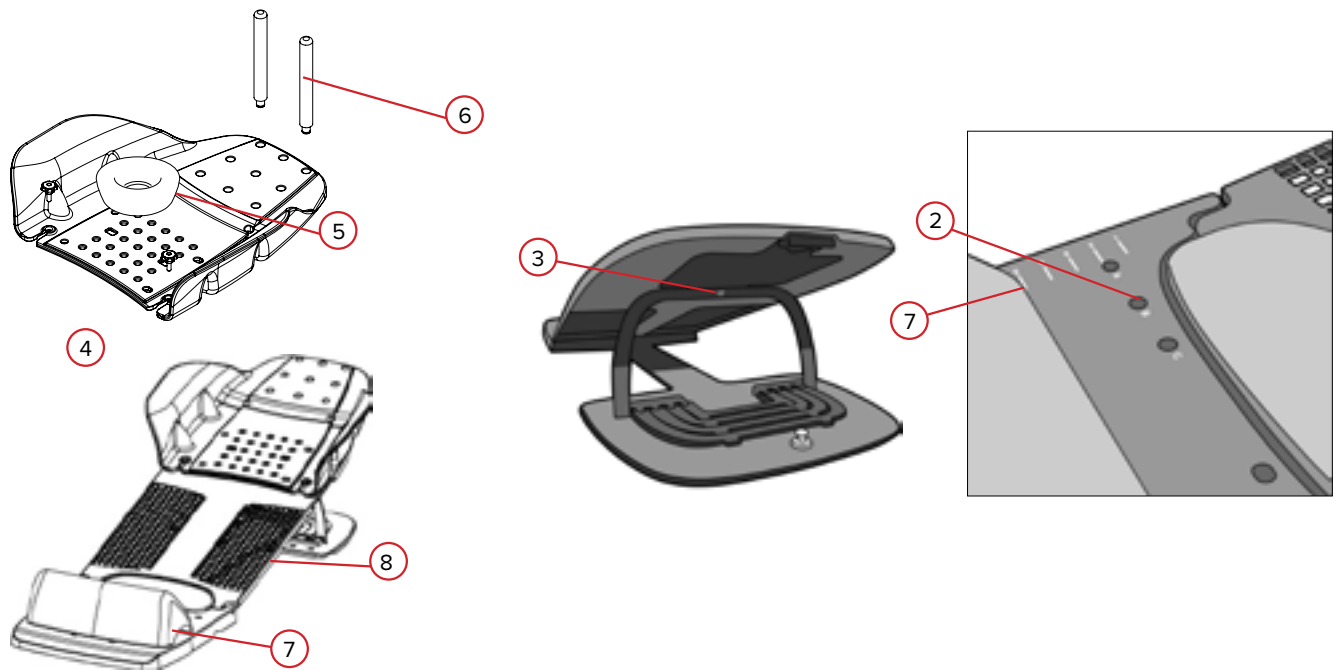

- Diindeks ke meja simulasi atau perawatan? **Ya** **Tidak** Jika ya, pengaturan Takik indeks
- Lokasi pin bilah pengaturan lokasi (pilih salah satu): **A** **B** **C**
- Sudut Permukaan Pasien (pilih salah satu): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Digunakan dengan ArmShuttle: **Ya** **Tidak**
- Lokasi sandaran kepala (nomor 1–28):
- Lokasi Gagang Tangan (pilih yang digunakan)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **TIDAK DIGUNAKAN**
- Penahan Pantat digunakan? **Ya** **Tidak** Jika ya, dengan pengaturan apa? (nomor 1–8)
- Lokasi laser penanda samping:

LEMBAR PENYIAPAN

RT-4546: Perangkat Payudara & Paru-Paru Access Supine, RT-4546MRI: Perangkat MR Payudara & Paru-Paru Access Supine,
RT-4546-01: Perangkat Payudara Access Supine, atau RT-4546-02: Perangkat Payudara & Paru-Paru Tanpa-Kisi Access Supine

Nama Pasien:

No. ID Pasien:

Disiapkan oleh:

Dokter:

Tanggal:

Komentar:



- Diindeks ke meja simulasi atau perawatan? **Ya** **Tidak** Jika ya, pengaturan Takik indeks
- Lokasi pin bilah pengaturan lokasi (pilih salah satu): **A** **B** **C**
- Sudut Permukaan Pasien (pilih salah satu): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Lokasi dan sudut Penyangga Lengan (pilih salah satu)—
Sisi Kiri Pasien: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Sisi Kanan Pasien: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Tinggi Penyangga Lengan (nomor 1–8): Sisi Kiri Pasien Sisi Kanan Pasien
- Panjang Penyangga Lengan (pilih salah satu): Sisi Kiri Pasien: **A** **B** **C** Sisi Kanan Pasien: **A** **B** **C**
- Lokasi Penyangga Pergelangan Tangan (huruf A hingga H): Sisi Kiri Pasien Sisi Kanan Pasien
- Sudut Penyangga Pergelangan Tangan:
Sisi Kiri Pasien: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Sisi Kanan Pasien: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Tinggi Penyangga Pergelangan Tangan (huruf W–Z): Sisi Kiri Pasien Sisi Kanan Pasien



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com