

PRODUKTVEILEDNING OG BRUKERHÅNDBOK

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01 og RT-4546-02

Access[™] Supine bryst og lunge

Access[™] Supine MR bryst og lunge

Access[™] Supine bryst

Access[™] Supine bryst og lunge, uten gitter





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Produsert i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com
------------------------------	---	--

Exact® er et registrert varemerke som tilhører Varian Medical Systems.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix og ArmShuttle Elite er varemerker som tilhører Qfix.

Cidex® er et registrert varemerke som tilhører Johnson & Johnson.

Clorox® er et registrert varemerke som tilhører The Clorox Company.

! MERK ! Gjennom hele denne bruksanvisningen brukes "Access Supine" som betegnelse for alle Access™ Supine-enheter, inkludert Access™ Supine bryst og lunge, Access Supine MR bryst og lunge og Access™ Supine bryst, med mindre annet er angitt.

INNHALDSFORTEGNELSE

GENERELLE FORHOLDSREGLER	4
VARSLER	4
ALVORLIGE HENDELSER	4
KLEMSØNER	4
ATTENUASJON AV BEHANDLINGSSTRÅLE	4
INFORMASJON OM MR-SIKKERHET	5
ADVARSELETIKETTER OG BESKRIVELSER	6
BEREGNET BRUK	7
EGENSKAPER	8
BESKRIVELSE	8
KOMPONENTER	8
INSTRUKSJONER FOR BRUK	10
INSTALLASJON	10
OPPSETT	11
FJERNING	16
VEDLIKEHOLD	17
RENGJØRE SYSTEMET	17
DESINFISERE SYSTEMET	17
SKIFTE UT SIDEMERKING	18
SPESIFIKASJONER	19
MÅL	19
DELELISTE	20
OPPSETTARK	21
RT-4546: ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, RT-4546MRI: ACCESS SUPINE MR BRYST OG LUNGE, RT-4546-01: ACCESS SUPINE BRYST ELLER RT-4546-02: ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, UTEN GITTER	21
RT-4546: ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, RT-4546MRI: ACCESS SUPINE MR BRYST OG LUNGE, RT-4546-01: ACCESS SUPINE BRYST ELLER RT-4546-02: ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, UTEN GITTER	22

GENERELLE FORHOLDSREGLER

VARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLATT Å FORETA ENDRINGER PÅ DETTE UTSTYRET. HVIS NOEN DEL AV DENNE ENHETEN UTSETTES FOR EKSTREM BELASTNING, VIRKER SKADET ELLER IKKE FUNGERER SOM DEN SKAL, MÅ DU UMIDDELBART SLUTTE Å BRUKE DEN OG KONTAKTE QFIX PÅ +1 484-720-6053 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! ADVARSEL ! SØRG FOR AT VINKELSTIGER ER FESTET I SPORET LANGS HENGSELET FØR DU BRUKER ENHETEN. HVIS IKKE KAN DET FØRE TIL SKADE PÅ ENHETEN ELLER PERSONSKADE.


! ADVARSEL ! STIGER MÅ ALDRI HEVES ELLER SENKES MED EN PASIENT PÅ ENHETEN.

! ADVARSEL ! ENHETEN MÅ ALDRI LØFTES ELLER BÆRES VED Å HOLDE I ARM- ELLER HÅNDEDDSTØTTENE.

! ADVARSEL ! LA ALDRI PASIENTER JUSTERE POSISJONEN VED HJELP AV ARMSHUTTLE-HÅNDTAKENE.

! ADVARSEL ! LA ALDRI PASIENTER JUSTERE POSISJONEN VED HJELP AV ARM- OG HÅNDEDDSTØTTENE.

! ADVARSEL ! ARMSHUTTLE MÅ IKKE BRUKES TIL Å JUSTERE VINKELN PÅ PASIENTOVERFLATEN.

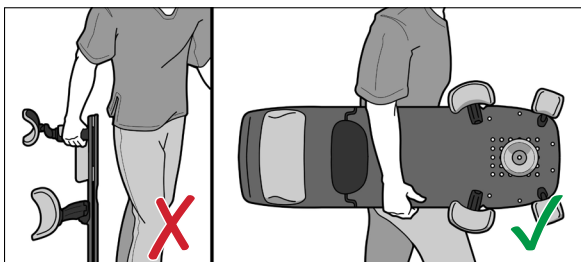

ALVORLIGE HENDELSER

Rapporter alle alvorlige hendelser (f.eks. hendelser som fører til, eller kan føre til død eller alvorlig personskade) til både Qfix og den relevante myndigheten i landet.

KLEMSONER

- Klemsoner kan forekomme når høyden på armstøtten eller håndleddsstøtten skal justeres.
- Klemsoner kan forekomme når vinkelen på armstøtten eller håndleddsstøtten skal justeres.
- Klemsoner kan forekomme i hengselet mellom pasientoverflaten og bunnplaten.

ATTENUASJON AV BEHANDLINGSSTRÅLE

Access Supine er utformet for å kunne posisjonere pasienten slik at strålen for de fleste posteroanteriore (PA) behandlingsfelt passerer gjennom enhetens lungeutsnitt. De strukturelle områdene til Access Supine har en vannekivalens på 5 mm ved 6 MV. Behandling gjennom behandlingsbordet vil øke attenuasjonen. Faktisk attenuasjon basert på oppsett skal verifiseres med det aktuelle utstyret i bruk. Behandling gjennom enhver enhet, selv en som er laget av komposittmateriale, vil føre til en økt huddose.

GENERELLE FORHOLDSREGLER

INFORMASJON OM MR-SIKKERHET

 Tilleggsutstyret 20-graders og 25-graders stiger er MR-sikre.

Ikke-klinisk testing har vist at tilleggsutstyret 20-graders og 25-graders stiger kan brukes i et MR-system som oppfyller følgende betingelser:

- Stigene må brukes med den MR-sikre versjonen av Access Supine (RT-4546MRI) tydelig merket med følgende symbol før MR-skanning:



 Arm- og håndleddsstøttene er MR-betingede.

Ikke-klinisk testing har vist at arm- og håndleddsstøttene kan brukes i et MR-system som oppfyller følgende betingelser:

- Arm- og håndleddsstøttene kan plasseres i åpningen i et MR-system som har et statisk magnetfelt på 1,5 T eller mindre.
- Arm- og håndleddsstøttene må brukes med den MR-sikre versjonen av Access Supine (RT-4546MRI) i henhold til beregnet bruk før skanning.
- Den MR-sikre versjonen av Access Supine (RT-4546MRI) er tydelig merket med følgende symbol:



 Rumpestopperen er MR-betinget.

Ikke-klinisk testing har vist at rumpestopperen kan brukes i et MR-system som oppfyller følgende betingelser:


- Rumpestopperen kan plasseres i åpningen i et MR-system som har et statisk magnetfelt på 1,5 T eller mindre.
- Rumpestopperen må brukes med den MR-sikre versjonen av Access Supine (RT-4546MRI) i henhold til beregnet bruk før skanning.
- Den MR-sikre versjonen av Access Supine (RT-4546MRI) er tydelig merket med følgende symbol:



GENERELLE FORHOLDSREGLER


ADVARSELETIKETTER OG BESKRIVELSER

Du finner en liste over symboler og definisjonen av dem på Qfix.com.

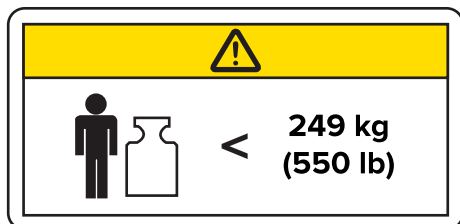

BELASTNING

IKKE overskrid 249 kg (550 pund) jevnt fordelt belastning eller maksimal sikker arbeidsbelastning for kVue-innsatsen eller bordunderstellet, avhengig av hvilken som er lavest.

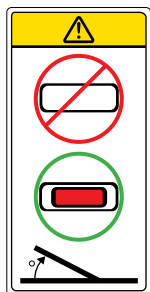

STIGEADVARSEL

Når du bruker Access Supine på skrått, må du sørge for at stigen er ordentlig låst på plass, og at de røde endene på stigen er synlige fra toppen av enheten.

Hvis Access Supine brukes på skrått uten å feste stigen ordentlig på plass, kan det føre til skade på enheten eller personskade.



MR-SIKKER

Et element som ikke utgjør noen kjente farer som følge av eksponering for et MR-miljø. MR-sikre elementer består av materialer som er elektrisk ikke-ledende, ikke-metalliske og ikke-magnetiske.

! MERK ! KUN TIL RT-4546MRI.

BEREGNET BRUK

Denne enheten er beregnet på immobilisering, posisjonering og reposisjonering av pasienter som gjennomgår strålebehandling.

! MERK ! Amerikansk lov krever at dette utstyret kun selges av eller etter fullmakt fra lege.

PASIENTMÅLGRUPPER

Pasienter som gjennomgår strålebehandling eller prosedyrer med diagnostisk avbildning.

TILTENKTE BRUKERE

Tiltente brukere for produktene er personer som er kvalifisert i henhold til kravene i lokale forskrifter.




EGENSKAPER

BESKRIVELSE

Access Supine skal brukes med 2 plasseringsstenger med to pinner, f.eks. RT-4551BAR, slik at den kan festes sikkert til bordtoppen for simulering eller behandling. Disse plasseringsstengene følger ikke med Access Supine og må kjøpes separat fra produsenten av bordet.

Access Supine bruker tilleggsutstyret armstøtter (RT-4546AA-01) og håndleddsstøtter (RT-4546AW-01) til å holde overarmene og håndleddene i en reproduserbar posisjon. Tilleggsutstyret ArmShuttle™ (RT-4546C) kan brukes i stedet for arm- og håndleddsstøtten.

KOMPONENTER

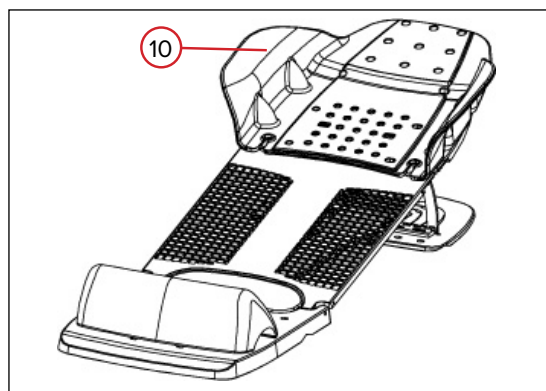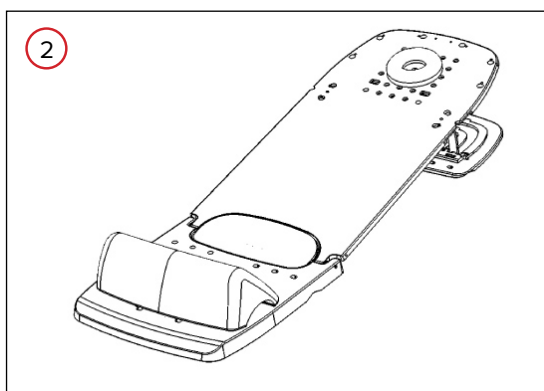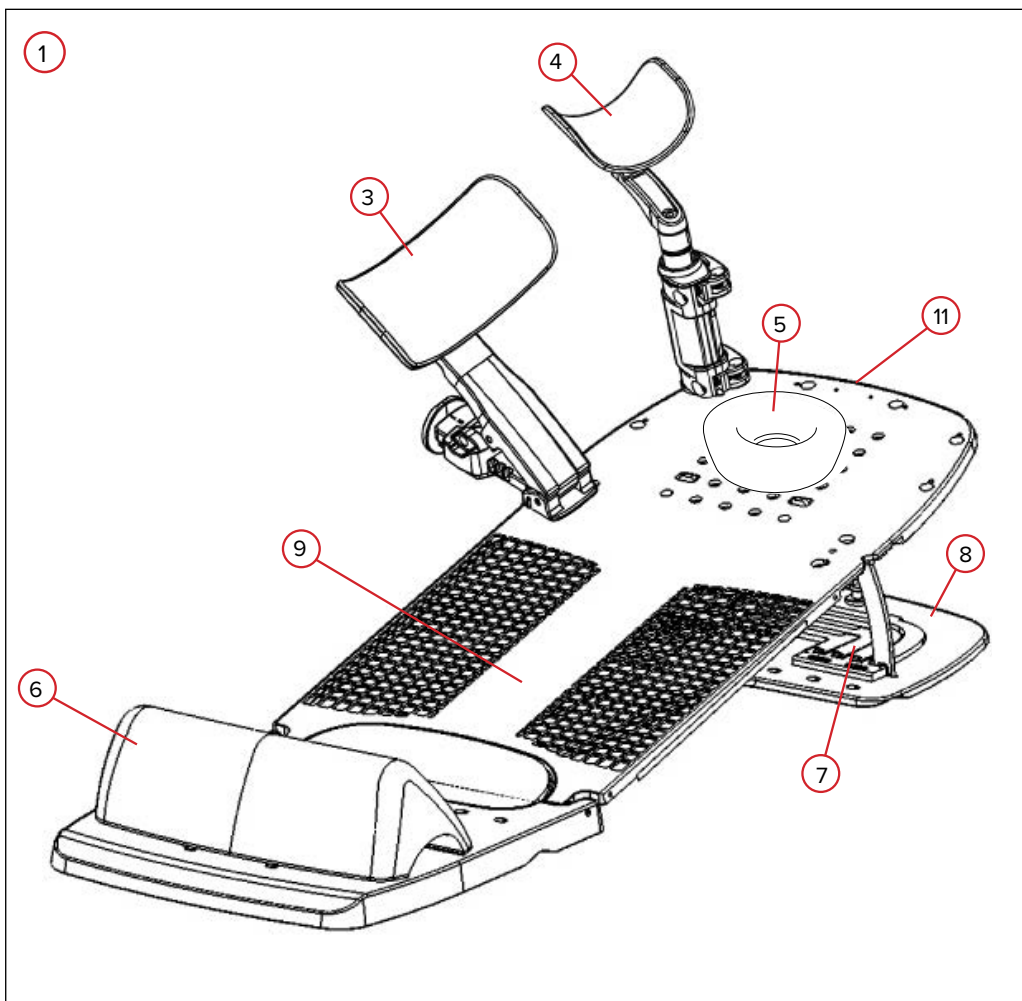

EGENSKAPER

KOMPONENTER

1. ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, ACCESS SUPINE BRYST OG ACCESS SUPINE BRYST OG LUNGE, UTEN GITTER

Access Supine brukes til å hjelpe til med å posisjonere og klargjøre pasienter som gjennomgår strålebehandling av brystet og lungene.

2. ACCESS SUPINE MR BRYST OG LUNGE

Access Supine MR (malt hvit) fungerer på samme måte som Access Supine, men kan brukes med MR.

3. ARMSTØTTE

Armstøttene har et komplett spekter av justeringer for nøyaktig posisjonering av den øvre delen av pasientens armer under simulering og behandling.

4. HÅNDEDDSTØTTE

Håndleddsstøttene justeres for å støtte pasientens håndledd under simulering og behandling.

5. HODESTØTTE

Hodestøtten som følger med, kan posisjoneres på ulike steder (merket med 1 til 28) på Access Supine. Andre hodestøtter er tilgjengelige som tilleggsutstyr, deriblant store og små gelhodestøtter og TIMO B-hodestøtten.

6. RUMPESTOPPER

Den indekserbare rumpestopperen som følger med, holder riktig pasientposisjonering ved å bidra til å forhindre at pasienten sklir ned på Access Supine.

7. VINKELSTIGER

Vinkelstigene gjør det mulig å vinkle pasientens hode og torso vertikalt i vinkler på 0, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 grader. Andre stiger er tilleggsutstyr som gjør det mulig å vinkle pasientens hode og torso vertikalt i 20 eller 25 grader.

8. BUNNPLATE

Bunnplaten gir festepunkter for vinkelstigene og rumpestopperen og muliggjør sikker festing til simulerings- eller behandlingsbordet.

9. PASIENTOVERFLATE

Pasientoverflaten er den delen av enheten som justeres mellom 0 og 15 grader for behandling.

10. ARMSHUTTLE ELITE

ArmShuttle Elite kan brukes i stedet for armstøttene til å posisjonere pasientens arm under simulering og behandling. Den brukes vanligvis sammen med en VacQfix™-pute.

11. UTLØSNINGSLÅS

Utløsningslåsen fester pasientoverflaten til bunnplaten.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

INSTALLASJON

INSTALLERE ACCESS SUPINE

1. Sett endene av plasseringsstengene inn i de relevante Varian Exact®-kompatible indekssporene på bordtoppen eller enheten med en avstand på 700 mm (vanligvis 5 hakk) fra hverandre, og klikk plasseringsstengene på plass. (Fig. 1)
2. Posisjoner Access Supine over plasseringsstangen slik at hullene i bunnplaten innrettes med de to pinnene i plasseringsstengene. (Fig. 2)
3. Lås Access Supine på plass ved å skyve Access Supine på plasseringsstangen. (Fig. 3)

! MERK ! Access Supine kan forskyves til begge sider for å plassere tumoren nærmere isosenteret etter ønske.

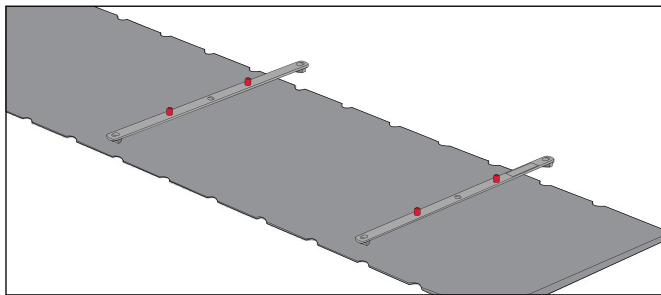


FIG. 1

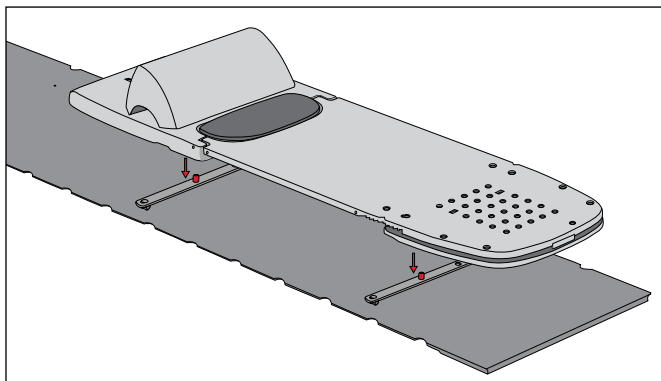


FIG. 2

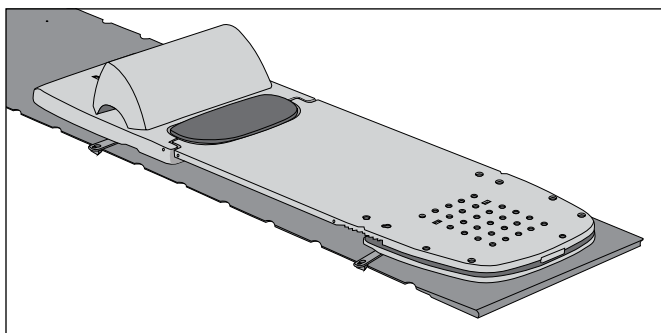


FIG. 3

INSTRUKSJONER FOR BRUK

OPPSETT

PASIENTVINKEL

! FORSIKTIG ! NÅR DU BRUKER ACCESS SUPINE PÅ SKRÅTT, MÅ DU SØRGE FOR AT VINKELSTIGENE ER FESTET TIL TOPPANELET, OG AT DE RØDE ENDENE ER SYNLIGE FRA OVER ENHETEN. HVIS VINKELSTIGENE IKKE ER ORDENTLIG FESTET, KAN DET FØRE TIL SKADE PÅ PASIENTEN OG/ELLER SKADE PÅ ENHETEN.

1. Lås opp ved å trykke på utløsningslåsen. (Fig. 4)
2. Løft opp pasientoverflaten, og hev vinkelstigen på plass. (Fig. 5 og 6)
3. Senk pasientoverflaten til vinkelstigen låser seg i sporene. Når den har gått i lås, vil de røde endene på vinkelstigen være synlige fra pasientoverflaten. (Fig. 7)



FIG. 5

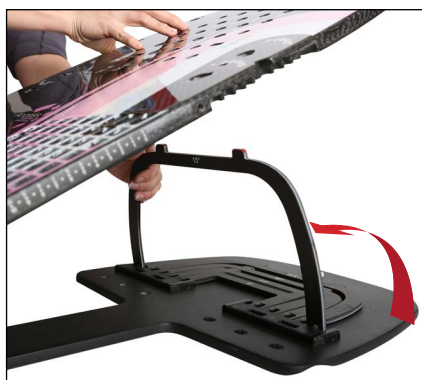


FIG. 6



FIG. 4

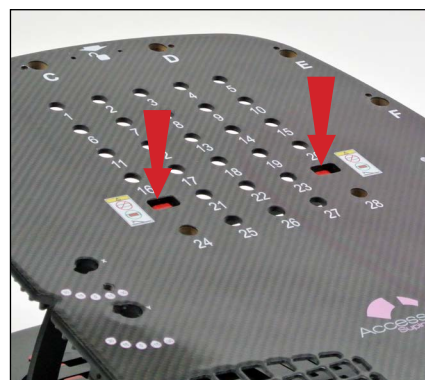


FIG. 7

! MERK ! Når TILLEGGSUTSTYRET stiger på 20 eller 25 grader skal installeres, setter du inn en av dem i de åpne sporene på vinkelstigehengselet. (Fig. 8)



FIG. 8

HODESTØTTE

Installer hodestøtten i én av de tilgjengelige posisjonene (1–28) i den superiore enden av pasientoverflaten. (Fig. 9 og 10)

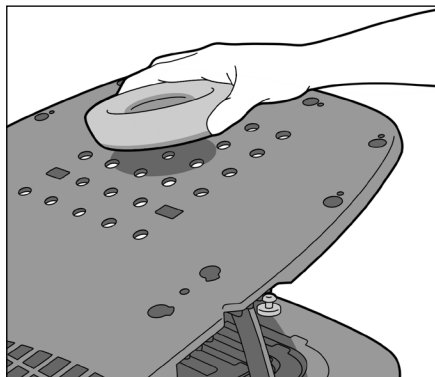


FIG. 9

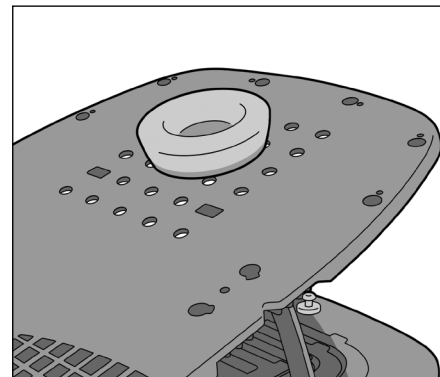


FIG. 10

INSTRUKSJONER FOR BRUK

OPPSETT

ARMSTØTTE

1. For å feste armstøtten løsner du knotten og setter den inn på ett av de to stedene (merket med "X" og "Y"). Lås armstøtten på pasientoverflaten ved å trekke til knotten. (Fig. 11)
2. Juster armstøttens rotasjon ved å løsne knotten og rotere armstøtten til ønsket sted før knotten trekkes til. (Fig. 12)

! FORSIKTIG ! IKKE TREKK FOR HARDT TIL.

3. Når du skal justere høyden, trykker du ned knappen på glidebryteren for høyde og skyver den langs armen. Slipp knappen når ønsket posisjon er nådd. (Fig. 13)
4. Når du skal justere lengden på armen, trykker du ned knappen på glidebryteren for lengde og skyver den langs armen. Slipp knappen når ønsket posisjon er nådd. (Fig. 14)

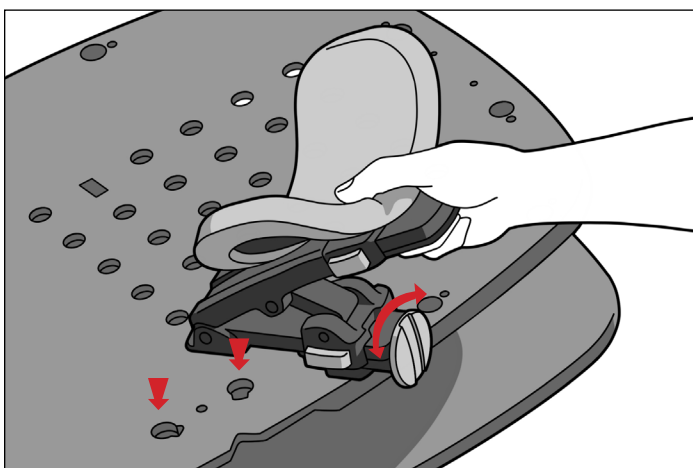


FIG. 11

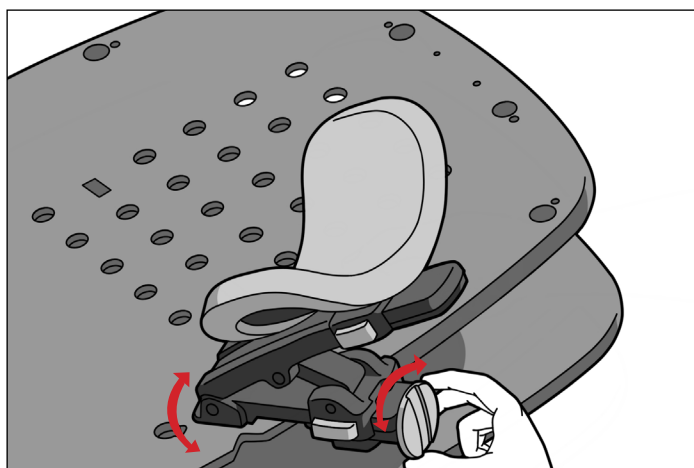


FIG. 12

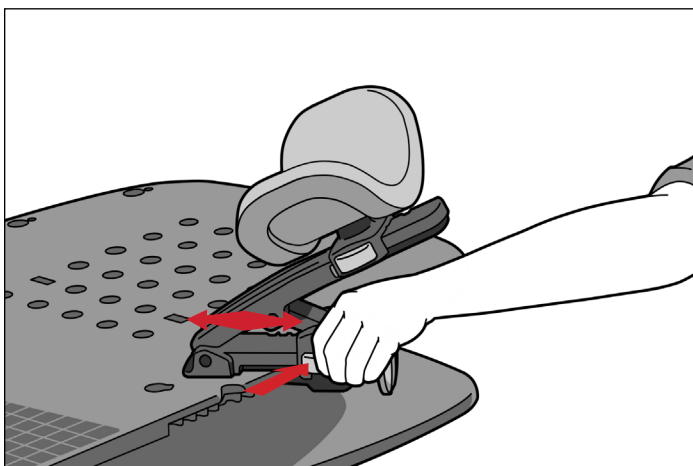


FIG. 13

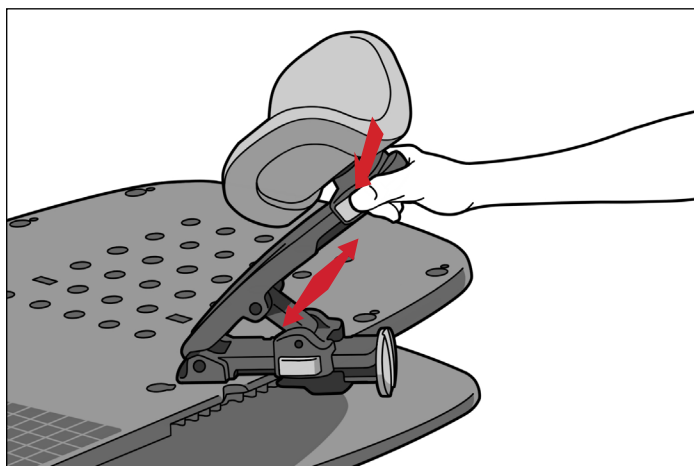


FIG. 14

INSTRUKSJONER FOR BRUK

OPPSETT

HÅNDEDDSSTØTTE

1. Når du skal feste håndleddsstøtten, innretter du begge tappene i bunnen av håndleddsstøtten med de to tilsvarende hullene i pasientoverflaten. (Fig. 15)
2. Lås på plass ved å lukke den nedre spaken. (Fig. 16)
3. Hev eller senk håndleddsstøttekoppen ved å åpne den øvre spaken. Hev, senk eller roter koppen til ønsket posisjon, og lukk den øvre spaken. (Fig. 17 og fig. 18)

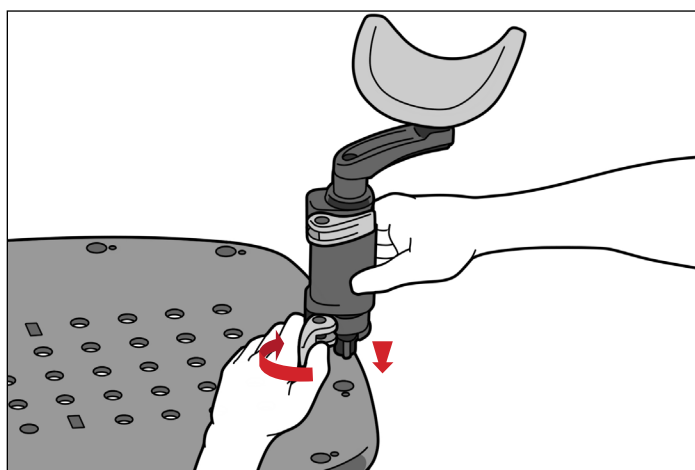


FIG. 15

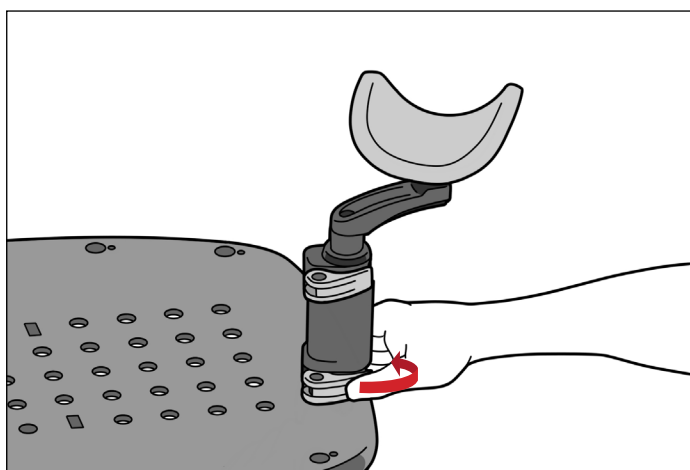


FIG. 16

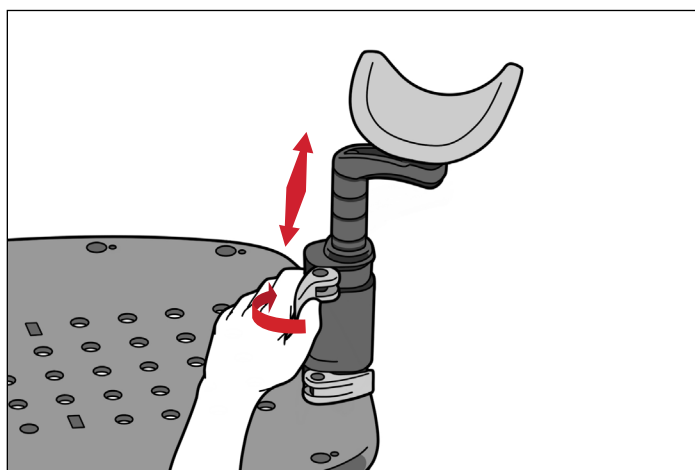


FIG. 17

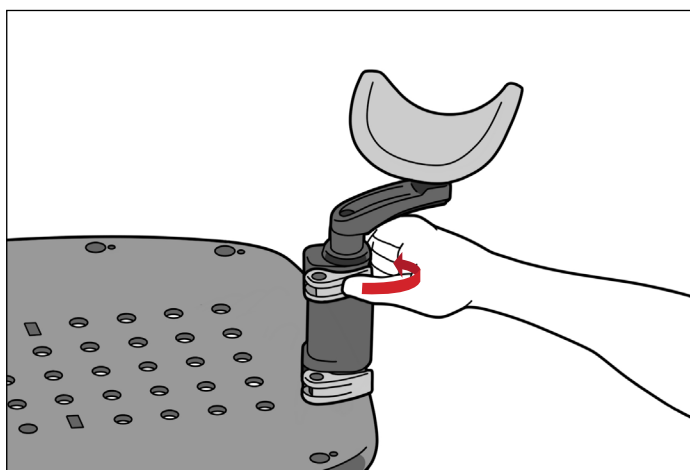


FIG. 18

INSTRUKSJONER FOR BRUK

OPPSETT

RUMPESTOPPER

1. Posisjoner rumpestopperen slik at den buede siden vender mot pasientoverflaten, og sett den inn i åpningen nederst i sporene. (Fig. 19)
2. Når rumpestopperen er festet til bunnplaten, kan den posisjoneres ved å skyve den superior (rumpestopperen vil skralle i denne retningen). (Fig. 20)
3. Flytt rumpestopperen inferior ved å løfte den litt og skyve den bakover til ønsket sted. (Fig. 21)

! MERK ! Figur 22 viser indekseringsstedene for rumpestopperen og plasseringsstangen.



FIG. 19



FIG. 20



FIG. 21



FIG. 22

INSTRUKSJONER FOR BRUK

OPPSETT

ARMSHUTTLE ELITE

! MERK ! ArmShuttle er et alternativ til arm- og håndleddsstøttene. Informasjon om instruksjoner for bruk, produktegenskaper, spesifikasjoner, advarsler, forsiktighetsregler og andre generelle forholdsregler knyttet til bruken av ArmShuttle, finnes i produkthåndboken og brukerhåndboken for ArmShuttle (P/N 2004227).

1. Fjern armstøtten(e) ved å løsne på knotten, rotere armstøtten slik at den er på linje med hakket på siden av pasientoverflaten og trekke armstøtten ut av hullene i pasientoverflaten. (Fig. 23)
2. Fjern håndleddsstøtten(e) ved å åpne den nedre spaken og trekke håndleddsstøtten ut av hullene i pasientoverflaten. (Fig. 24)
3. Plasser ArmShuttle oppå Access Supine, samtidig som du innretter festeknotthullene med de gjengede hullene mellom armstøttestedene på Access Supine. (Fig. 25)
4. Fest ArmShuttle med festekottene ved å dreie dem med klokken til de er trukket til. (Fig. 25)

! MERK ! Figur 26 viser det fullførte oppsettet.

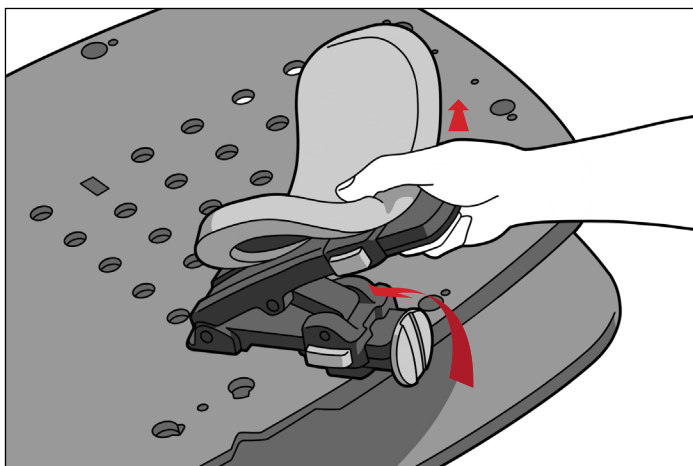


FIG. 23

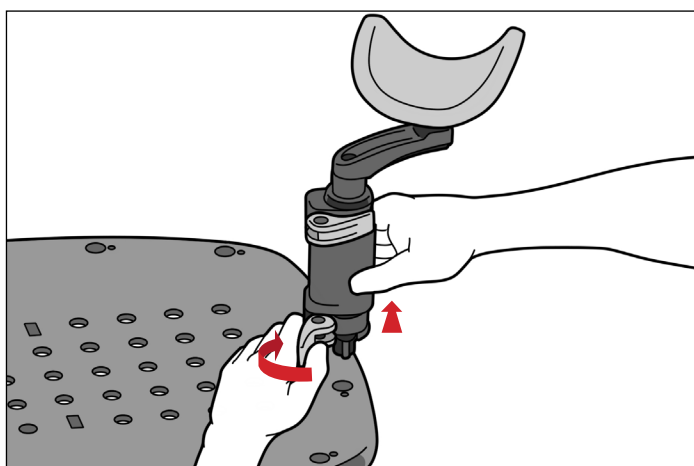


FIG. 24

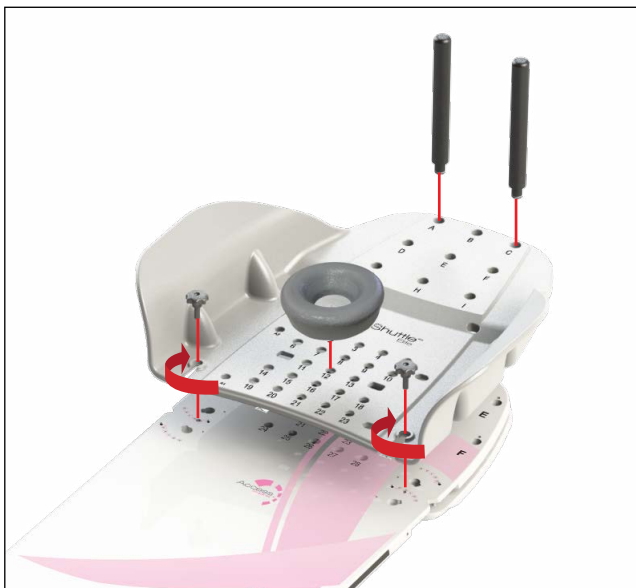


FIG. 25



FIG. 26

INSTRUKSJONER FOR BRUK

FJERNING

ARMSHUTTLE ELITE

1. Fjern knotter som fester ArmShuttle, ved å dreie dem mot klokken.
2. Gjenta trinn 1 på motsatt side.
3. Løft ArmShuttle opp fra pasientoverflaten.

RUMPESTOPPER

1. Flytt rumpestopperen inferiort ved å løfte den litt opp og skyve den bakover til fjerningsstedet.
2. Løft rumpestopperen opp og ut av bunnplaten.

ARMSTØTTE

Løsne på knotten, roter armstøtten slik at den er på linje med hakket på siden av pasientoverflaten, og trekk armstøtten ut av hullene i pasientoverflaten.

HÅNDEDDSSTØTTE

Åpne den nedre spaken, og trekk håndleddsstøtten ut av hullene i pasientoverflaten.

HODESTØTTE

Løft hodestøtten opp til den fjernes fra plasseringshullet.

ACCESS SUPINE

1. Løft pasientoverflaten, og senk vinkelstigen til den ligger flatt på bunnplaten.
2. Senk pasientoverflaten til du hører at den klikker, og lås den i bunnplaten.
3. Løft Access Supine av plasseringsstengene.
4. Løft opp hver ende av plasseringsstengene for å fjerne dem fra bordtoppen.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRE SYSTEMET

Enheten kan rengjøres med en mild, ikke-slipende rengjørings- eller desinfeksjonsløsning. Rengjør ved å påføre løsningen på en ren klut og tørke av overflaten. Inspiser enheten visuelt. Dersom den ikke er ren, må de foregående rengjøringstrinnene gjentas til den er visuelt ren. Bruk en ren klut som er fuktet med vann, og tørk av enheten for å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddel. Tørk av enheten med en ren, tørr klut for å tørke den. Følgende rengjøringsmateriale har blitt testet og vist seg å passe for enheten.

- Vann
- Såpe og vann

DESINFISERE SYSTEMET

Se spesifikke instruksjoner fra produsenten av rengjøringsmiddelet for å desinfisere enhetens overflate.

- 10 % Clorox®-blekemiddelløsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktivert dialdehydløsning

Kontroller regelmessig at alle festene er stramme.

VEDLIKEHOLD

SKIFTE UT SIDEMERKING

1. Fjern den nåværende sidemerkingsetiketten helt, inkludert alle limrester.
2. Ta papirbaksiden av den nye etiketten.
3. Innrett justeringsmerket midt på sideskalaen med registreringsmerket på pasientoverflaten og den nedre kanten på etiketten like over den nedre kanten på pasientoverflaten. Null skal være posisjonert i hodeenden av enheten. (Fig. 27 og 28)
4. Trykk hele etiketten bestemt mot siden på enheten.
5. Gjenta på den andre siden ved behov.

! MERK ! IKKE sett etiketten på pasientoverflatens radius, ettersom det kan føre til at etiketten faller av.

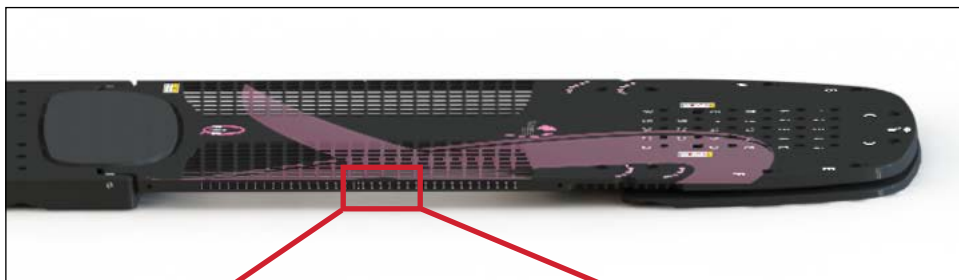


FIG. 27

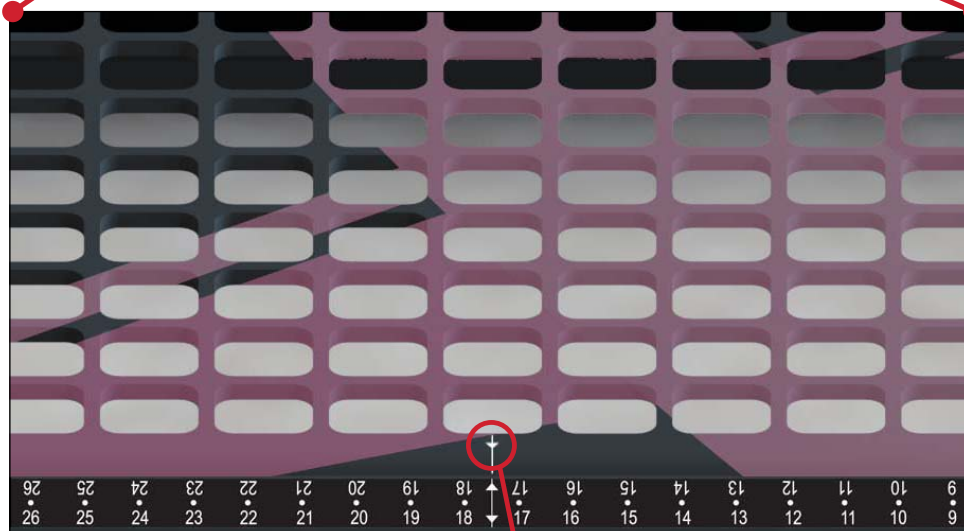


FIG. 28

registreringsmerke


SPESIFIKASJONER

MÅL


Lengde (L): 1374 mm

Vektgrense: 249 kg (550 pund) jevnt fordelt belastning

Vannekvivalens: Merk: Gjelder bare for RT-4546 – Access™ Supine bryst og lunge:
~ 3 mm ved 6 MV i behandlingsområdene

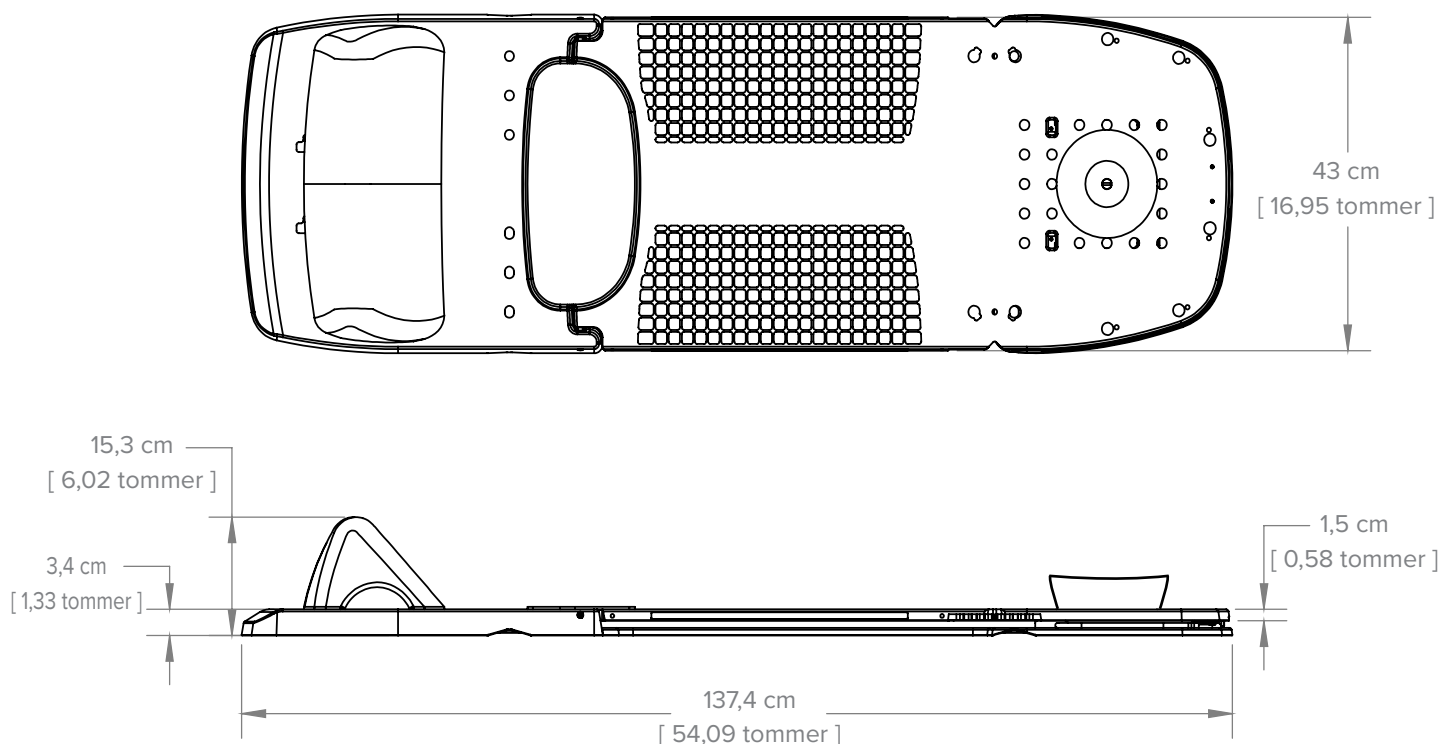

DELELISTE

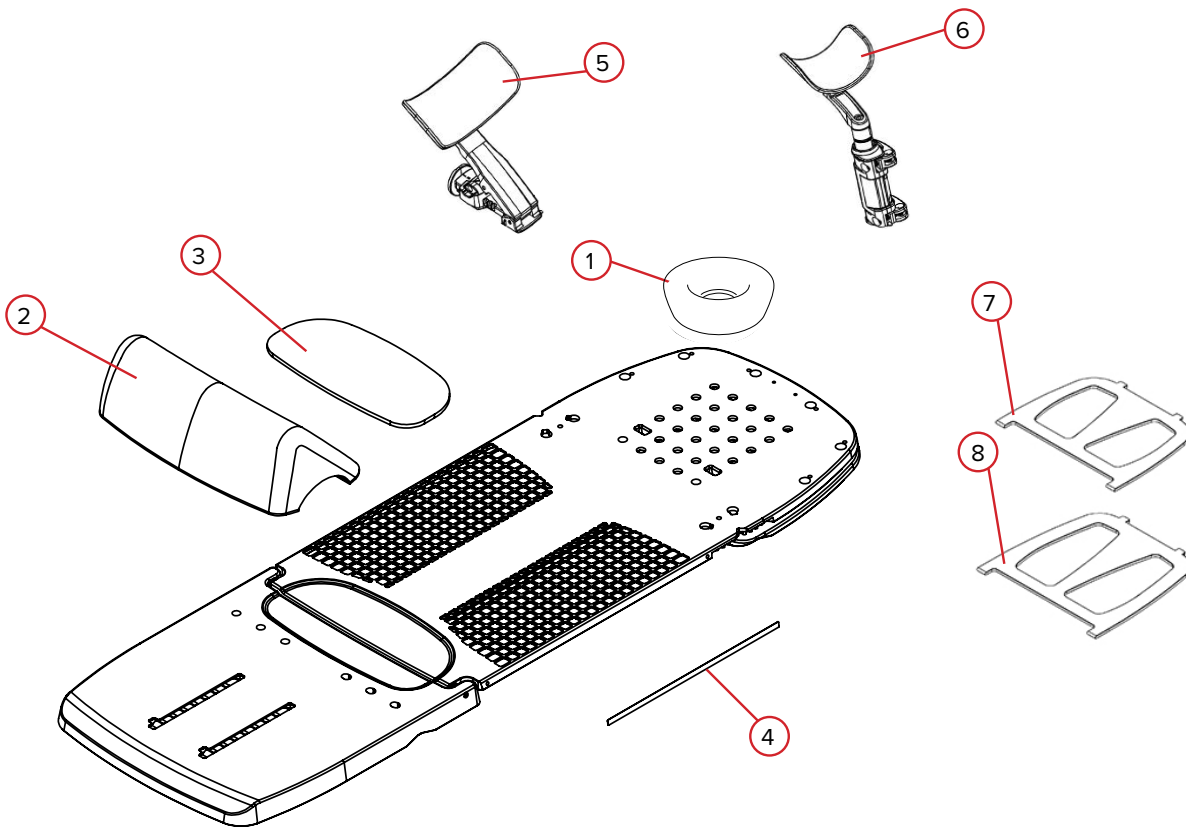

RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01 og RT-4546-02

- 1. RT-4546H – Hodestøtte i skum
- 2. 2004034 – Rumpestopper i skum
- 3. 2004047 – Halebeinspute
- 4. 2004392 – Sidemerkingsetikett (1 per stk.)

RT-4546AA-01

- 5. 2005353 – Armkoppute i skum, omslag

RT-4546AW-01

- 6. 2005386 – Håndleddskoppute i skum, omslag

RT-4546L

- 7. 2004121 – Stige, tilleggsutstyr, 20 grader
- 8. 2004122 – Stige, tilleggsutstyr, 25 grader

OPPSETTARK

RT-4546: Access Supine bryst og lunge, RT-4546MRI: Access Supine MR bryst og lunge,
RT-4546-01: Access Supine bryst eller RT-4546-02: Access Supine bryst og lunge, uten gitter

Pasientnavn:


Pasient-ID-nummer:

Oppsett utført av:

Lege:

Dato:

Kommentarer:

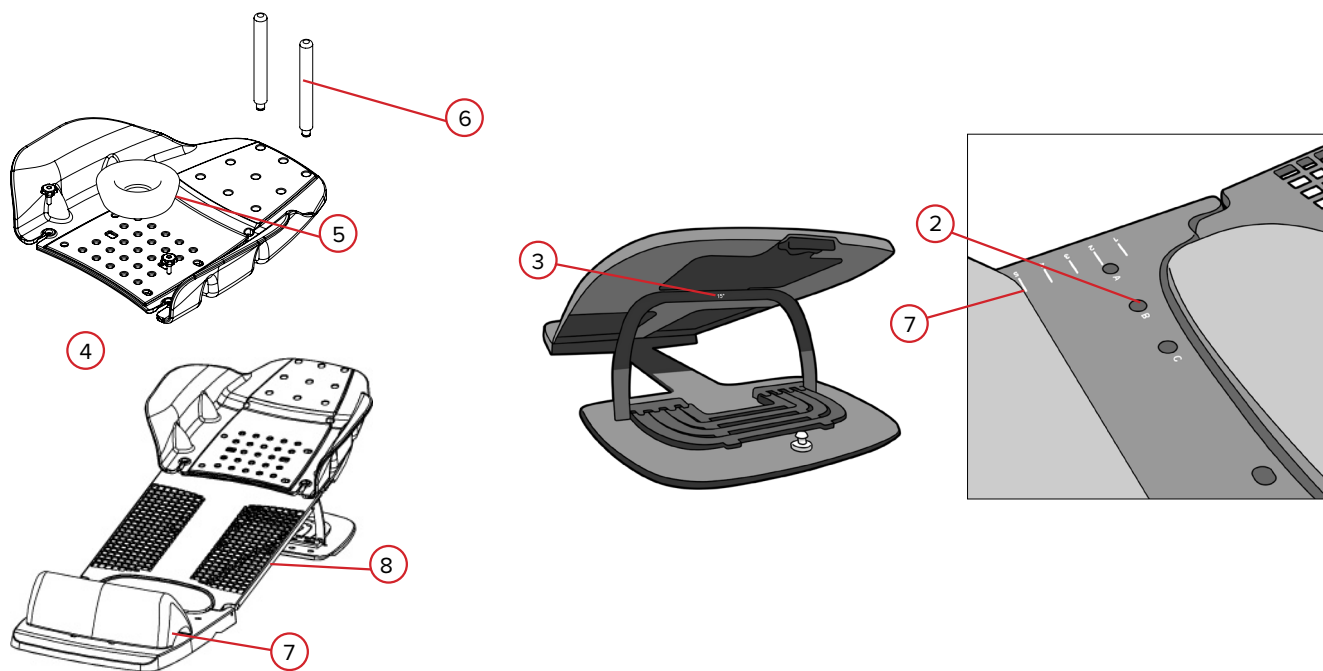

1. Indeksert til stimulerings- eller behandlingsbord? **Ja** **Nei**
Hvis ja, indekssporinnstilling
2. Plasseringsstangpinnens plassering (velg én): **A** **B** **C**
3. Pasientoverflatens vinkel (velg én): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Brukt med ArmShuttle: **Ja** **Nei**
5. Hodestøttens plassering (nummer 1–28):
6. Håndstolpen(e)s plassering (velg de som er i bruk)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **INGEN ER I BRUK**
7. Er rumpestopper i bruk? **Ja** **Nei** Hvis ja, hvilken innstilling? (nummer 1–8)
8. Plassering av sidemerking for laser:

OPPSETTARK

RT-4546: Access Supine bryst og lunge, RT-4546MRI: Access Supine MR bryst og lunge,
RT-4546-01: Access Supine bryst eller RT-4546-02: Access Supine bryst og lunge, uten gitter

Pasientnavn:


Pasient-ID-nummer:

Oppsett utført av:

Lege:

Dato:

Kommentarer:

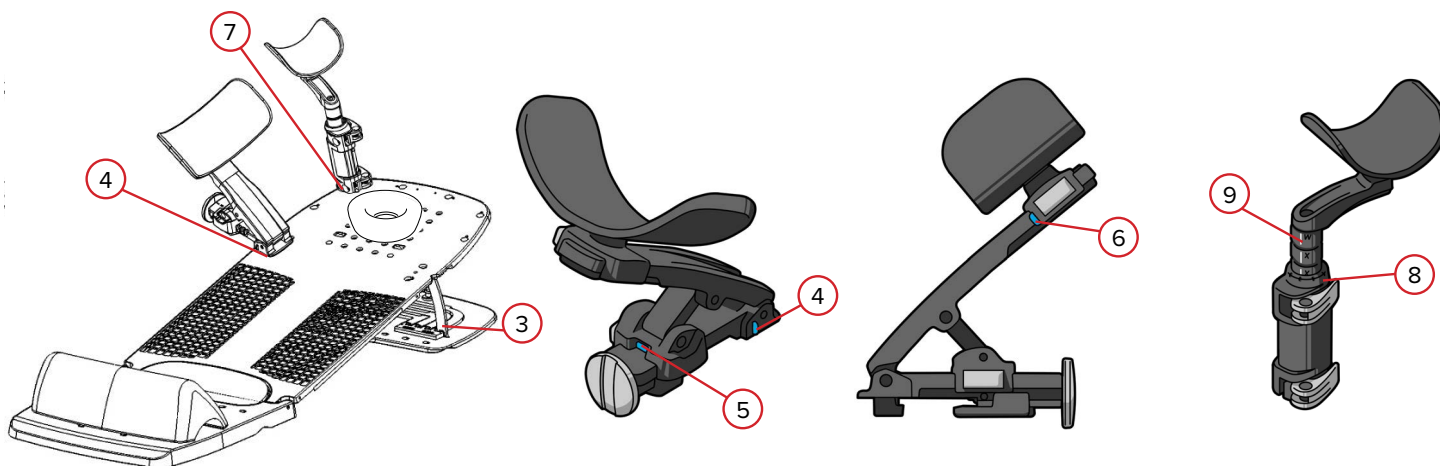

- Indeksert til stimulerings- eller behandlingsbord? **Ja** **Nei**
Hvis ja, indekssporinnstilling
- Plasseringsstangpinnens plassering (velg én): **A** **B** **C**
- Pasientoverflatens vinkel (velg én): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Plassering av og vinkel på armstøtter (velg én) –
På pasientens venstre side: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
På pasientens høyre side: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Armstøttenes høyde (nummer 1–8):
På pasientens venstre side På pasientens høyre side
- Armstøttenes lengde (velg én):
På pasientens venstre side: **A** **B** **C** På pasientens høyre side: **A** **B** **C**
- Håndleddsstøttenes plassering (bokstav fra A til H):
På pasientens venstre side På pasientens høyre side
- Håndleddsstøttenes vinkel:
På pasientens venstre side: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
På pasientens høyre side: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Håndleddsstøttenes høyde (bokstavene W–Z):
På pasientens venstre side På pasientens høyre side



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 484.20.6053 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com