

VODIČ ZA PROIZVOD I UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01 i RT-4546-02

Access™ Supine za tretmane dojki i pluća

Access™ Supine za MR dojki i pluća

Access™ Supine za tretmane dojki

Access™ Supine za tretmane dojki i pluća, bez mreže



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Exact® je registrovani žig kompanije Varian Medical Systems.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix i ArmShuttle Elite predstavljaju žigove kompanije Qfix.

Cidex® je registrovani žig kompanije Johnson & Johnson.

Clorox® je registrovani žig kompanije The Clorox Company.

! NAPOMENA ! U potpunom ovom uputstvu za upotrebu „Access Supine” odnosi se na sve Access™ Supine proizvode, uključujući Access™ Supine za tretmane dojki i pluća, Access™ Supine za MR dojki i pluća i Access™ Supine za tretmane dojki osim ako nije drugačije naznačeno.

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI

IZJAVE UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NIJE DOZVOLJENA NIKAKVA MODIFIKACIJA OVE OPREME. AKO BILO KOJI DEO OVOG PROIZVODA DOŽIVI KATASTROFALNO OPTEREĆENJE, IZGLEDA KAO DA JE OŠTEĆEN ILI FUNKCIONIŠE NEPRAVILNO, ODMAH PREKINITE SA KORIŠĆENJEM I OBRATITE SE KOMPANIJI CQ MEDICAL PUTEM BROJA +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ILI ADRESE SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! UPOZORENJE ! UVERITE SE DA SU MERDEVINE ZA PODEŠAVANJE UGLA PRIČVRŠĆENE U ŽLEB DUŽ ŠARKE PRE UPOTREBE PROIZVODA. U SUPROTNOM, MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA PROIZVODA ILI POVREDE.


! UPOZORENJE ! NIKAD NEMOJTE PODIZATI ILI SPUŠTATI MERDEVINE DOK JE PACIJENT NA SISTEMU.

! UPOZORENJE ! NIKAD NE PODIŽITE I NE NOSITE PROIZVOD DRŽEĆI GA ZA OSLOMCE ZA RUKE ILI ZGLOBOVE.

! UPOZORENJE ! NE DOZVOLITE PACIJENTU DA PODEŠAVA POLOŽAJ POMOĆU ARMSHUTTLE RUKOHVATA.

! UPOZORENJE ! NE DOZVOLITE PACIJENTU DA PODEŠAVA POLOŽAJ POMOĆU OSLOMCA ZA RUKE I ZGLOBOVE.

! UPOZORENJE ! NEMOJTE KORISTITI ARMSHUTTLE ZA PODEŠAVANJE UGLA POVRŠINE ZA PACIJENTA.

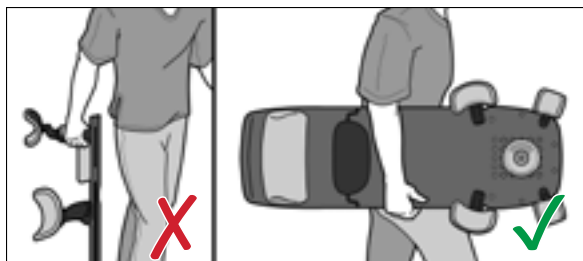

OZBILJNI INCIDENTI

Prijavite sve ozbiljne incidente (npr. incidente koji dovode ili mogu dovesti do smrti ili teških povreda) kompaniji CQ Medical i nadležnom organu vaše zemlje.

ZONE ZAGLAVLJIVANJA

- Zone zaglavljivanja mogu se pojaviti prilikom podešavanja visine oslonca za ruke ili zglobove.
- Zone zaglavljivanja mogu se pojaviti prilikom podešavanja ugla oslonca za ruke ili zglobove.
- Zone zaglavljivanja mogu se pojaviti unutar šarke između površine za pacijenta i osnovne ploče.

SLABLJENJE TERAPIJSKOG SNOPA

Access Supine je projektovan tako da se pacijent može postaviti tako da većina posteroanteriornih (PA) polja tretmana može biti raspoređena tako da snop prolazi kroz izreze za pluća na proizvodu. Strukturni regioni proizvoda Access Supine imaju ekvivalentnost vodi od 5 mm pri 6 MV. Tretman preko terapijskog stola

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI

povećaće ovo slabljenje. Stvarno slabljenje na osnovu podešavanja treba da se proveriti sa vašom konkretnom opremom. Tretman kroz bilo koji proizvod, čak i one napravljene od kompozitnog materijala, dovešće do povećanja površinske doze.

INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI PRI SNIMANJU MAGNETNOM REZONANCOM

 **Opcione dodatne merdevine od 20 stepeni i 25 stepeni bezbedne su za snimanje magnetnom rezonancom.**

Neklinička ispitivanja su pokazala da se **opcione dodatne merdevine od 20 stepeni i 25 stepeni** mogu koristiti sa MR sistemima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- Merdevine se moraju koristiti sa verzijom proizvoda **Access Supine (RT-4546MRI)** bezbednom za MR, jasno označenom sledećim simbolom pre snimanja magnetnom rezonancom:



 **Oslonci za ruke i zglobove uslovno su bezbedni za MR.**

Neklinička ispitivanja su pokazala da se **oslonci za ruke i zglobove** mogu koristiti sa MR sistemima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- **Oslonci za ruke i zglobove** mogu se postaviti u otvor MR sistema koji ima statičko magnetno polje od 1,5 T ili manje.
- **Oslonci za ruke i zglobove** moraju se koristiti sa verzijom proizvoda **Access Supine (RT-4546MRI)** bezbednom za MR u skladu sa njegovom namenom pre snimanja.
- Verzija sistema **Access Supine (RT-4546MRI)** bezbedna za MR jasno je označena sledećim simbolom:



 **Donji graničnik uslovno je bezbedan za MR.**

Neklinička ispitivanja su pokazala da se **donji graničnik** može koristiti sa MR sistemima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- **Donji graničnik** se može postaviti u otvor sistema za MR koji ima statičko magnetno polje od 1,5 T ili manje.
- **Donji graničnik** mora se koristiti sa verzijom proizvoda **Access Supine (RT-4546MRI)** bezbednom za MR u skladu sa njegovom namenom pre snimanja.
- Verzija sistema **Access Supine (RT-4546MRI)** bezbedna za MR jasno je označena sledećim simbolom:



OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI


OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Pogledajte CQmedical.com za listu simbola i njihove definicije.



NOMINALNO OPTEREĆENJE

NEMOJTE premašiti 249 kg (550 funti) ravnomerno raspoređenog opterećenja ili maksimalno bezbedno radno opterećenje kVue umetka ili osnove ležaja, šta god je manje.

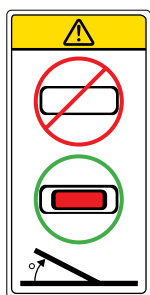

UPOZORENJE ZA MERDEVINE

Kad koristite Access Supine pod uglom, uverite se da su merdevine sigurno pričvršćene i da su crveni krajevi merdevina vidljivi sa vrha sistema.

Korišćenje proizvoda Access Supine pod uglom bez pravilnog pričvršćivanja merdevina može da ošteti proizvod ili da izazove povredu.



BEZBEDNO ZA MR

Predmet koji ne predstavlja poznate opasnosti kao rezultat izlaganja bilo kom MR okruženju. Predmeti bezbedni za MR sastoje se od materijala koji su električno neprovodni, nemetalni i nemagnetni.

! NAPOMENA ! SAMO ZA RT-4546MRI.

NAMENA

Proizvod je namenjen za imobilizaciju, pozicioniranje i repozicioniranje pacijenata koji se podvrgavaju terapiji zračenjem.

! NAPOMENA ! Savezni zakon Sjedinjenih Američkih Država ograničava prodaju ovog proizvoda na lekare ili po nalogu lekara.

CILJNE GRUPE PACIJENATA

Pacijenti koji se podvrgavaju terapiji zračenjem ili procedurama dijagnostičkog snimanja.

PREDVIĐENI KORISNICI

Predviđeni korisnik proizvoda jeste lice kvalifikovano u skladu sa zahtevima regulatornog regiona.




FUNKCIJE

OPIS

Access Supine treba da se koristi sa 2 lokalizacione šipke sa dva klina, kao što je RT-4551BAR, za bezbedno pričvršćivanje na ležaj za simulaciju ili tretman. Te lokalizacione šipke nisu uključene uz Access Supine i moraju se kupiti zasebno od proizvođača ležaja.

Access Supine koristi opcione oslonce za ruke (RT-4546AA-01) i oslonce za zglobove (RT-4546AW-01) za držanje nadlaktica i zglobova u ponovljivom položaju. Opcioni ArmShuttle™ (RT-4546C) može se koristiti umesto oslonaca za ruke i zglobove.

KOMPONENTE

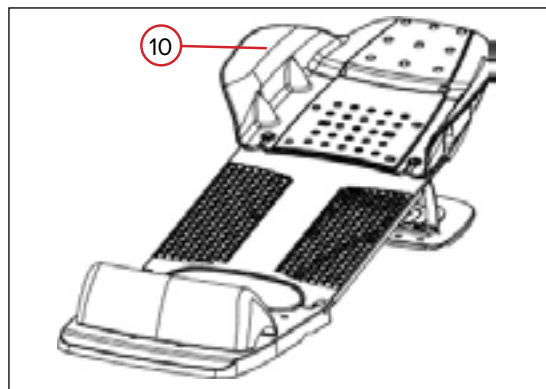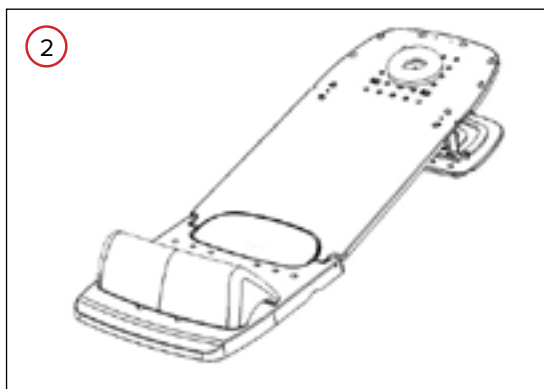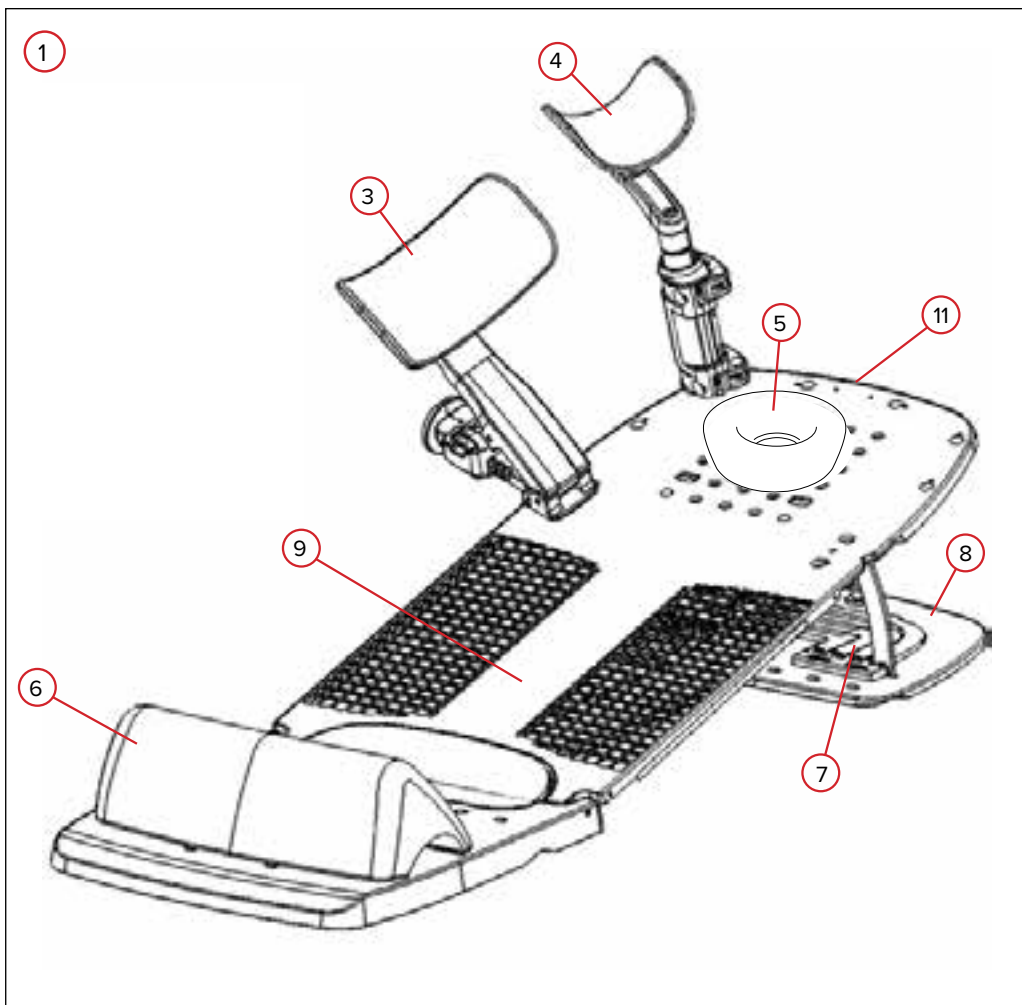

FUNKCIJE

KOMPONENTE

1. ACCESS SUPINE ZA TRETMANE DOJKI I PLUĆA, ACCESS SUPINE ZA TRETMANE DOJKI I ACCESS SUPINE ZA TRETMANE DOJKI I PLUĆA, BEZ MREŽE

Access Supine se koristi za pomoć u pozicioniranju i postavljanju pacijenata koji su podvrgnuti radioterapiji dojke i pluća.

2. ACCESS SUPINE ZA MR DOJKI I PLUĆA

Access Supine za MR (obojen u belo) funkcioniše isto kao Access Supine, ali se može koristiti prilikom snimanja magnetnom rezonancom.

3. OSOLONAC ZA RUKE

Oslonci za ruke imaju čitav opseg podešavanja za precizno pozicioniranje gornjeg dela pacijentovih ruku tokom simulacije i lečenja.

4. OSOLONAC ZA ZGLOBOVE

Oslonci za zglobove prilagođavaju se tako da podrže pacijentove zglobove tokom simulacije i tretmana.

5. NASLON ZA GLAVU

Uključeni naslon za glavu može se postaviti na različite lokacije (označene od 1 do 28) na sistemu Access Supine. Dostupni su opcioni nasloni za glavu, uključujući velike i male naslone za glavu s gelom i naslon za glavu TIMO B.

6. DONJI GRANIČNIK

Uključeni donji graničnik koji se može indeksirati održava pravilnu poziciju pacijenta tako što pomaže da se spreči da pacijent klizi niz Access Supine.

7. MERDEVINE ZA PODEŠAVANJE UGLA

Merdevine za podešavanje ugla omogućavaju da se glava i torzo pacijenta nagnu vertikalno pod uglovima od 0, 5, 7,5, 10, 12,5 i 15 stepeni. Opcione dodatne merdevine omogućavaju da se glava i torzo pacijenta nagnu vertikalno pod uglom od 20 ili 25 stepeni.

8. OSNOVNA PLOČA

Osnovna ploča obezbeđuje tačke pričvršćivanja za merdevine za podešavanje ugla i donji graničnik i omogućava sigurno pričvršćivanje na ležaj za simulaciju ili tretman.

9. POVRŠINA ZA PACIJENTA

Površina za pacijenta je deo sistema koji se prilagođava između 0 i 15 stepeni radi lečenja.

10. ARMSHUTTLE ELITE

ArmShuttle Elite se može koristiti umesto oslonaca za ruke za pozicioniranje ruke pacijenta tokom simulacije i lečenja. To se obično koristi zajedno sa jastukom VacQfix™.

11. BRAVA ZA OTPUŠTANJE

Brava za otpuštanje pričvršćuje površinu za pacijenta za osnovnu ploču.


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

INSTALACIJA


POSTAVLJANJE SISTEMA ACCESS SUPINE

1. Umetnite krajeve lokalizacionih šipki u odgovarajuće Varian Exact® kompatibilne indeksne zareze na ležaju ili proizvodu u razmaku od 700 mm (obično 5 zareza) i učvrstite lokalizacione šipke na mesto. (sl. 1)
2. Postavite Access Supine preko lokalizacione šipke tako da se otvori na osnovnoj ploči poravnaju sa dve igle na lokalizacionim šipkama. (sl. 2)
3. Gurnite Access Supine nadole na lokalizacionu šipku da biste zaključali Access Supine na mesto. (sl. 3)


! NAPOMENA ! Access Supine se po želji može pomeriti na bilo koju stranu da bi se tumor pozicionirao bliže izocentru.

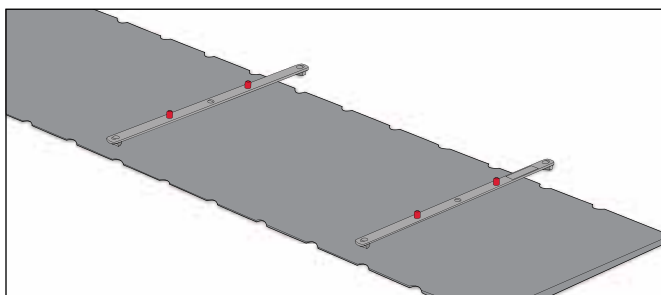

SL. 1

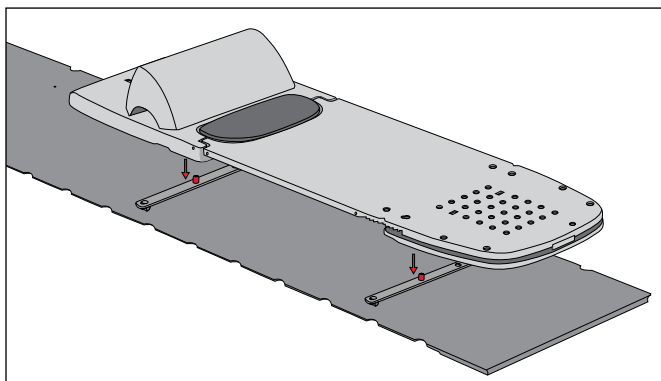

SL. 2

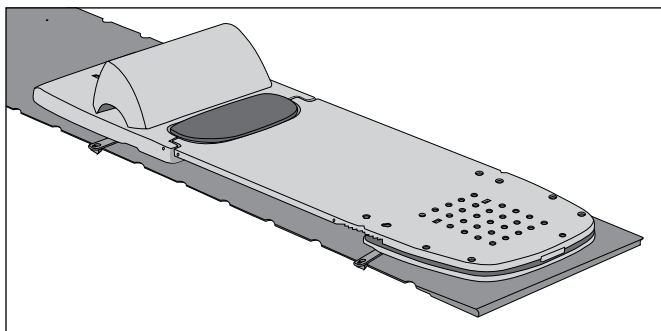

SL. 3

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

UGAO PACIJENTA

! OPREZ ! KAD KORISTITE ACCESS SUPINE POD UGLOM, UVERITE SE DA SU MERDEVINE ZA PODEŠAVANJE UGLA PRIČVRŠĆENE ZA GORNJU PLOČU I DA SU CRVENI KRAJEVI VIDLJIVI IZNAD SISTEMA. AKO MERDEVINE ZA PODEŠAVANJE UGLA NISU PRAVILNO PRIČVRŠĆENE, MOŽE DOĆI DO POVREDE PACIJENTA I/ILI OŠTEĆENJA PROIZVODA.

1. Pritisnite bravu za otpuštanje da biste je otključali. (sl. 4)
2. Podignite površinu za pacijenta i podignite merdevine za podešavanje ugla na odgovarajuće mesto. (sl. 5 i 6)
3. Spuštajte površinu za pacijenta dok se merdevine za podešavanje ugla ne pričvrste u proreze. Kad se pričvrste, crveni krajevi merdevina za podešavanje ugla biće vidljivi sa površine za pacijenta. (sl. 7)




SL. 4



SL. 5



SL. 6

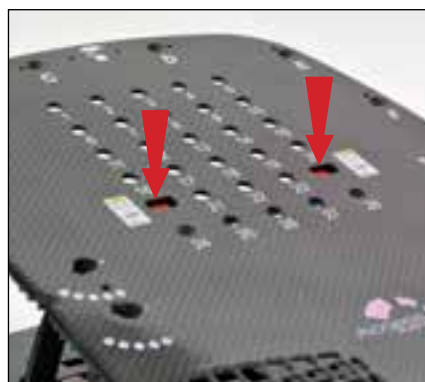

SL. 7


! NAPOMENA ! Da biste postavili **OPCIONE DODATNE** merdevine od 20 ili 25 stepeni, umetnite ih u otvorene proreze na šarki merdevina za podešavanje ugla. (sl. 8)




SL. 8

NASLON ZA GLAVU

Postavite naslon za glavu u jedan od dostupnih položaja (1–28) na gornjem kraju površine za pacijenta. (sl. 9 i 10)

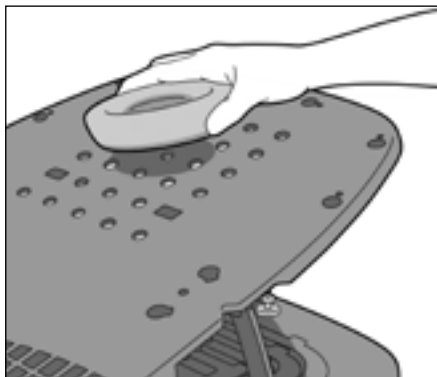

SL. 9

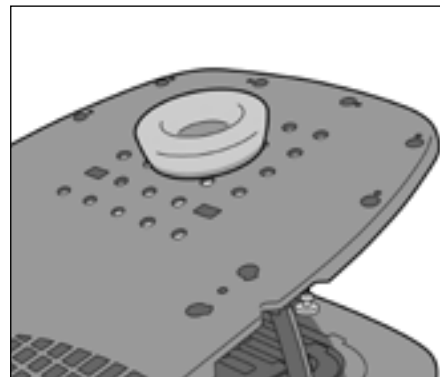


SL. 10

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


PODEŠAVANJE

OSLONAC ZA RUKE


1. Da biste pričvrstili oslonac za ruke, olabavite klin i umetnite ga u jednu od dve lokacije (označene sa „X“ i „Y“). Zategnite klin da biste pričvrstili oslonac za ruke na površinu za pacijenta. (sl. 11)
2. Da biste podesili rotaciju oslonca za ruke, olabavite klin i okrenite oslonac za ruke na željenu lokaciju i zategnite klin. (sl. 12)
- ! OPREZ ! NEMOJTE PREVIŠE ZATEZATI.**
3. Da biste podesili visinu, otpustite dugme koje se nalazi na klizaču za visinu i pomerajte ga duž ruke, otpuštajući dugme kad bude u željenom položaju. (sl. 13)
4. Da biste podesili dužinu ruke, otpustite dugme koje se nalazi na klizaču za dužinu i pomerajte ga duž ruke, otpuštajući dugme kad bude u željenom položaju. (sl. 14)

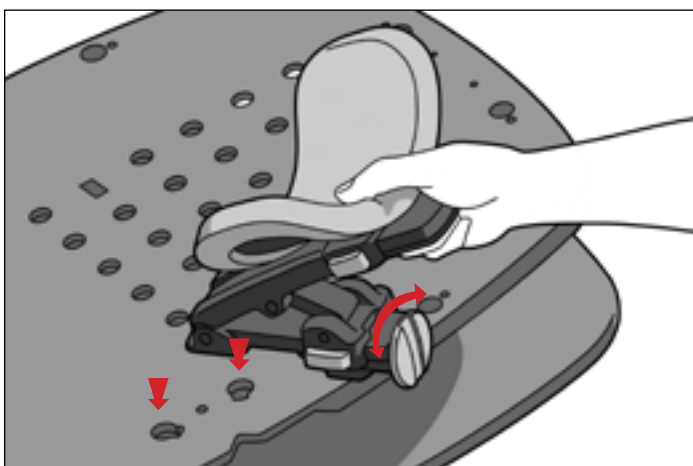


SL. 11

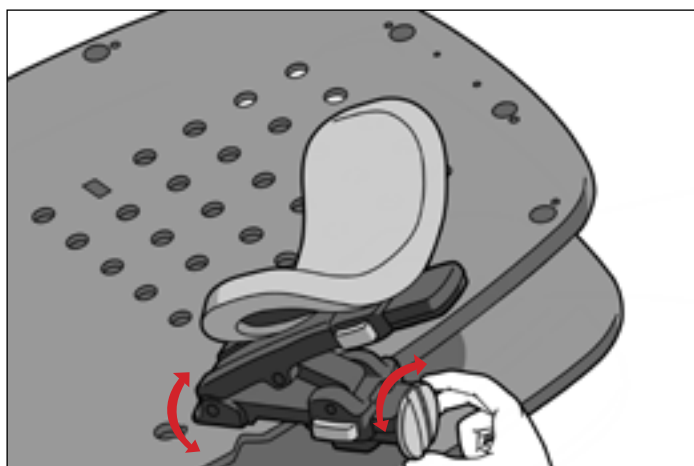

SL. 12

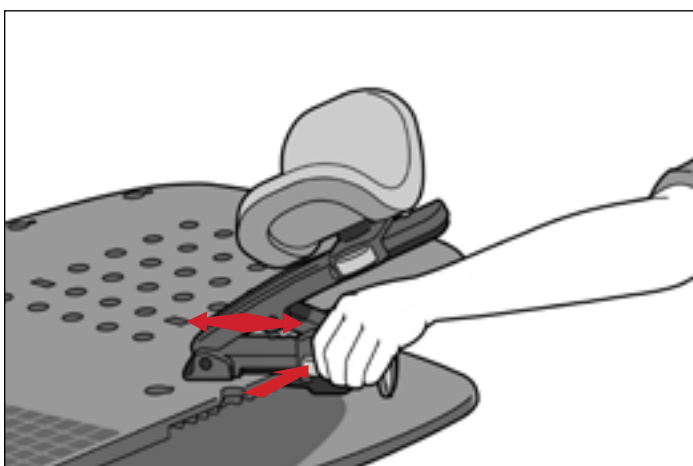

SL. 13

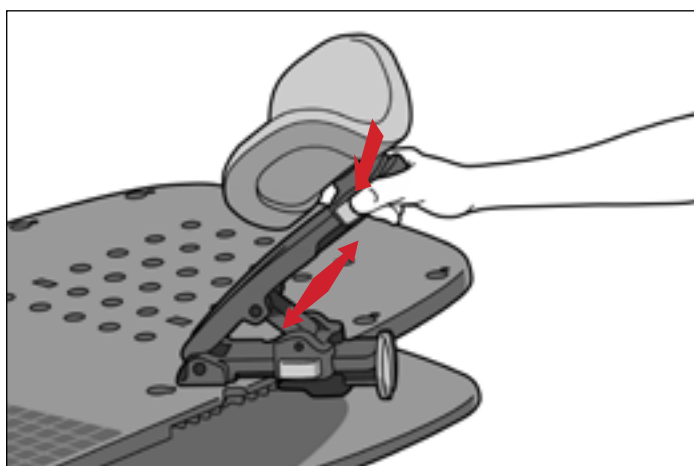


SL. 14

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


PODEŠAVANJE

OSLONAC ZA ZGLOBOVE


1. Da biste pričvrstili oslonac za zglobove, poravnajte oba klina na dnu oslonca za zglobove sa dva odgovarajuća otvora na površini za pacijenta. (sl. 15)
2. Zatvorite donju polugu da biste je fiksirali. (sl. 16)
3. Da biste podigli ili spustili čašicu oslonca za zglobove, otvorite gornju polugu. Podignite, spustite ili rotirajte čašicu u željeni položaj i zatvorite gornju polugu. (sl. 17 i sl. 18)

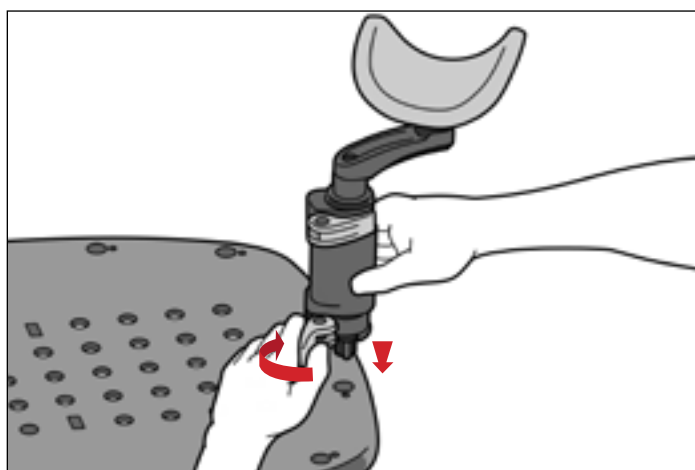


SL. 15

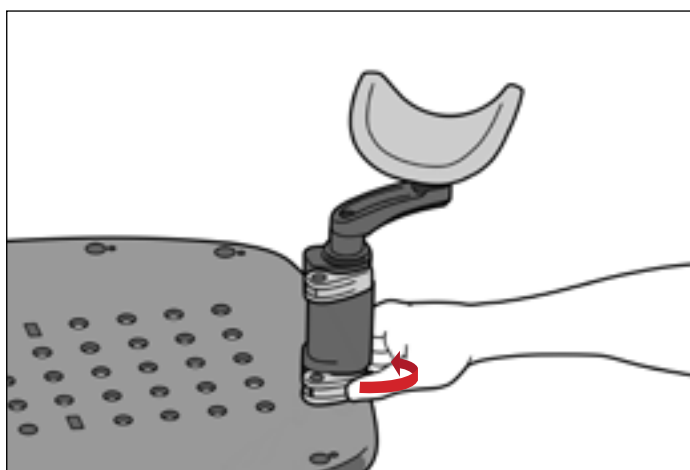

SL. 16

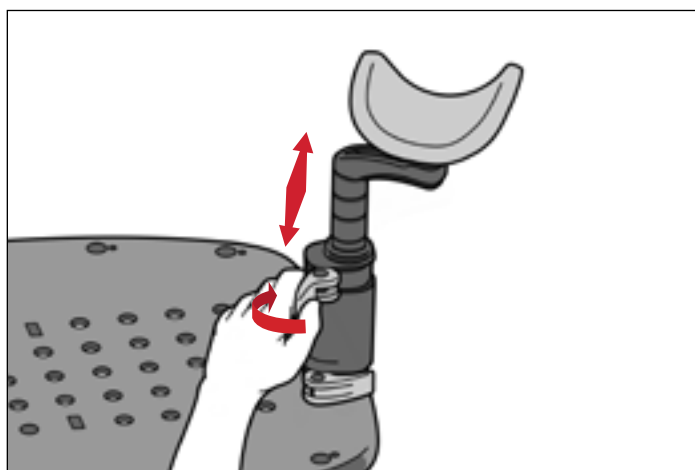

SL. 17

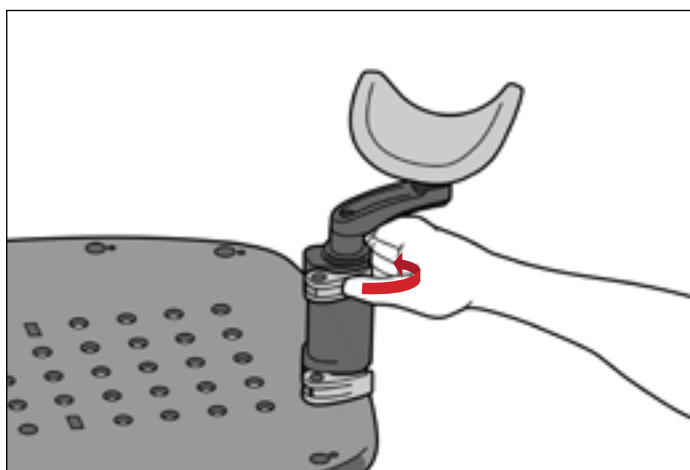

SL. 18

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

DONJI GRANIČNIK

1. Postavite donji graničnik tako da zakrivljena strana bude okrenuta prema površini za pacijenta i umetnite ga u otvor na dnu proreza. (sl. 19)
2. Kad se pričvrsti za osnovnu ploču, donji graničnik se može postaviti tako što ćete ga gurati s gornje strane (donji graničnik će se zaviti u tom pravcu). (sl. 20)
3. Da biste donji graničnik pomerili nadole, lagano ga podignite i povucite nazad na željenu lokaciju. (sl. 21)

! NAPOMENA ! Slika 22 prikazuje lokacije indeksiranja za donji graničnik i lokalizacionu šipku.




SL. 19



SL. 20



SL. 21

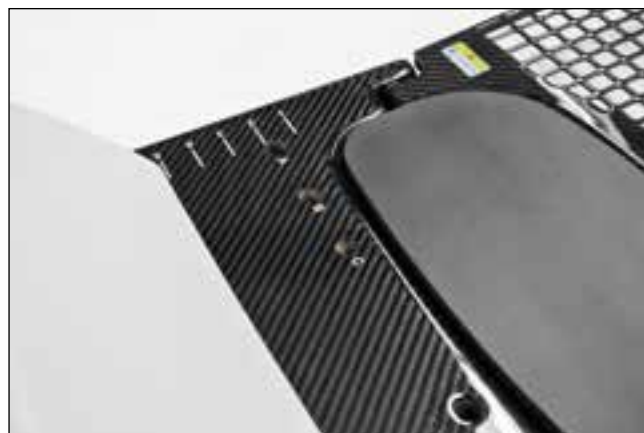

SL. 22

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


PODEŠAVANJE

ARMSHUTTLE ELITE


! NAPOMENA ! ArmShuttle je alternativa osloncima za ruke i zglobove. Pogledajte vodič za proizvod i uputstvo za upotrebu za Armshuttle (P/N 2004227) da biste pronašli uputstva za upotrebu, karakteristike proizvoda, specifikacije, upozorenja, mere opreza i druge opšte mere predostrožnosti u vezi sa upotrebom proizvoda Armshuttle.

1. Uklonite oslonce za ruke tako što ćete olabaviti klin, okrenuti oslonac za ruke tako da bude u liniji sa zarezom na bočnoj strani površine za pacijenta i izvući oslonac za ruke iz otvora na površini za pacijenta. (sl. 23)
2. Uklonite oslonce za zglobove tako što ćete otvoriti donju polugu i izvući oslonce za zglobove iz otvora na površini za pacijenta. (sl. 24)
3. Postavite ArmShuttle na Access Supine, poravnavajući otvore na klinovima za pričvršćivanje sa otvorima sa navojem koji se nalaze između lokacija oslonaca za ruke na proizvodu Access Supine. (sl. 25)
4. Osigurajte ArmShuttle klinovima za pričvršćivanje tako što ćete ih okretati u smeru kazaljke na satu dok se ne zategnu. (sl. 25)


! NAPOMENA ! Slika 26 prikazuje dovršeno podešavanje.

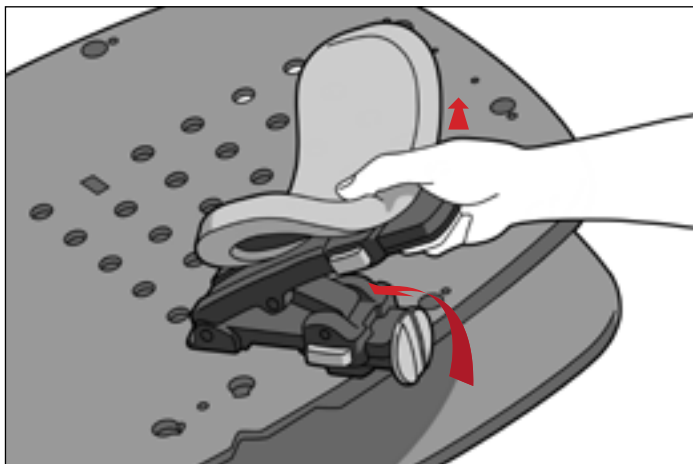

SL. 23

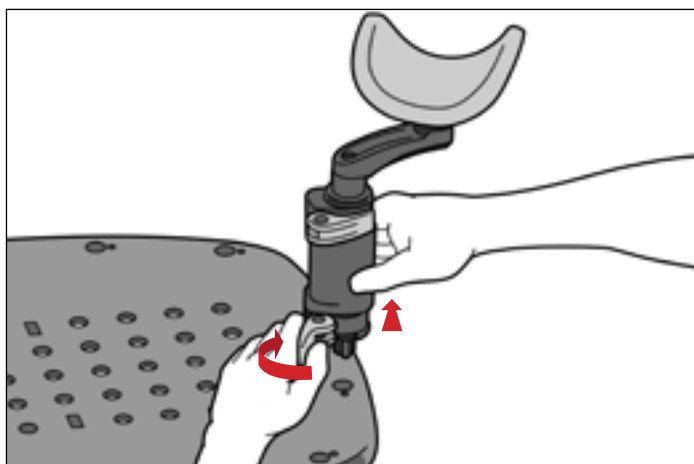

SL. 24

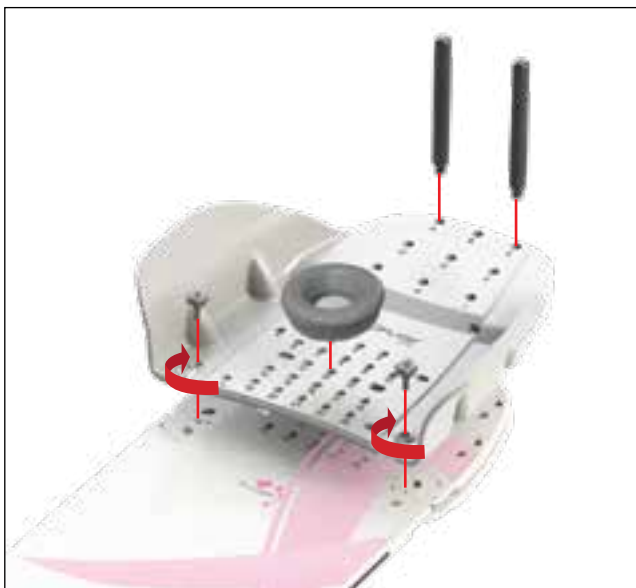

SL. 25



SL. 26

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UKLANJANJE

ARMSHUTTLE ELITE

1. Uklonite klinove koji pričvršćuju ArmShuttle okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Ponovite 1. korak za suprotnu stranu.
3. Podignite ArmShuttle sa površine za pacijenta.

DONJI GRANIČNIK

1. Pomerite donji graničnik nadole tako što ćete ga lagano podići i pomerati unazad do lokacije za uklanjanje.
2. Podignite donji graničnik sa osnovne ploče.

OSLONAC ZA RUKE

Olabavite klin, okrenite oslonac za ruke tako da bude u liniji sa zarezom na bočnoj strani površine za pacijenta i izvucite oslonac za ruke iz otvora na površini za pacijenta.

OSLONAC ZA ZGLOBOVE

Otvorite donju polugu i izvucite oslonce za zglobove iz otvora na površini za pacijenta.

NASLON ZA GLAVU

Podižite naslon za glavu dok ga ne izvučete iz otvora za lociranje.

ACCESS SUPINE

1. Podignite površinu za pacijenta i spuštajte merdevine za podešavanje ugla sve dok ne legnu na osnovnu ploču.
2. Spuštajte površinu za pacijenta dok ne čujete da je škljocnula i pričvrstila se za osnovnu ploču.
3. Podignite Access Supine sa lokalizacionih šipki.
4. Podignite oba kraja lokalizacionih šipki da biste ih uklonili sa gornje površine ležaja.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE SISTEMA

Uređaj se može očistiti blagim, neabrazivnim rastvorom za čišćenje ili dezinfekciju. Za čišćenje, nanesite rastvor na čistu krpu i obrišite površinu. Vizuelno pregledajte proizvod. Ako nije čist, ponovite prethodne korake čišćenja dok ne bude vizuelno čist. Koristite čistu krpu navlaženu vodom za brisanje proizvoda da biste uklonili ostatke sredstva za čišćenje. Da biste ga osušili, obrišite proizvod čistom, suvom krpom. Sledeći materijal za čišćenje je testiran i utvrđeno je da je prikladan za čišćenje proizvoda.

- Voda
- Sapun i voda

DEZINFEKCIJA SISTEMA

Da biste dezinfikovali površinu uređaja, pogledajte specifična uputstva proizvođača sredstva za čišćenje.

- Rastvor izbeljivača 10% Clorox®
- Izopropil-alkohol
- Aktivirani rastvor dialdehida Cidex® 2,4%


Povremeno proveravajte da li su svi pričvršćivači zategnuti.

ODRŽAVANJE


ZAMENA BOČNE OZNAKE

1. Potpuno uklonite trenutnu bočnu etiketu sa oznakama, uključujući sve ostatke lepka.
2. Odlepите papir sa nove etikete.
3. Poravnajte oznaku za poravnavanje na sredini bočne skale sa registracionom oznakom na površini za pacijenta, a donju ivicu etikete neposredno iznad donje ivice površine za pacijenta. Nula treba da bude postavljena na gornjem kraju sistema. (sl. 27 i 28)
4. Čvrsto pritisnite celu etiketu na bočnu stranu sistema.
5. Ponovite postupak i na drugoj strani, ako je to potrebno.

! NAPOMENA ! NEMOJTE stavljati etiketu na radijus površine za pacijenta, jer to može dovesti do odlepljivanja etikete.

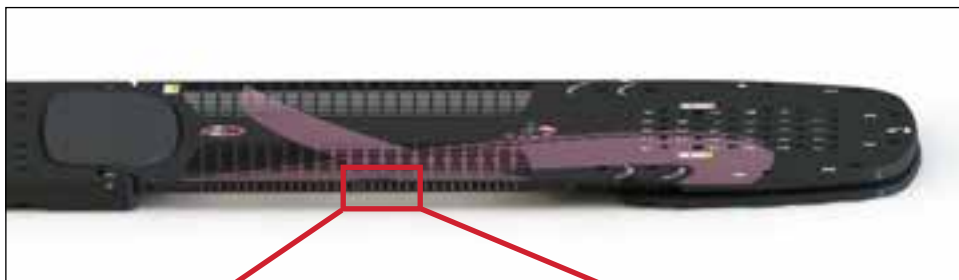

SL. 27

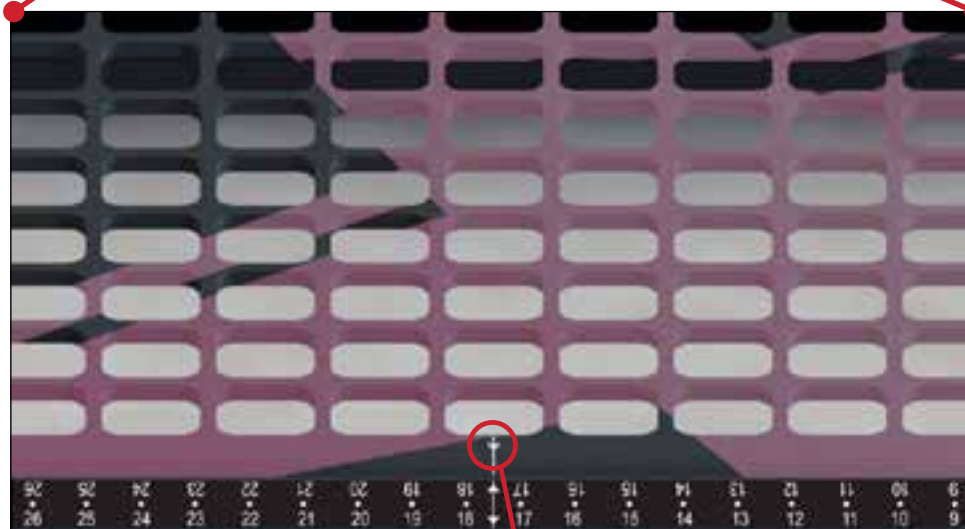

SL. 28

registraciona
oznaka


SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE


Dužina (D): 1374 mm

Ograničenje težine: 249 kg (550 funti) ravnomerno raspoređenog opterećenja

Ekvivalentnost vodi: *Napomena: Primenljivo samo za RT-4546 – Access™ Supine za tretmane dojki i pluća:*
~ 3 mm pri 6 MV u regionima za tretman

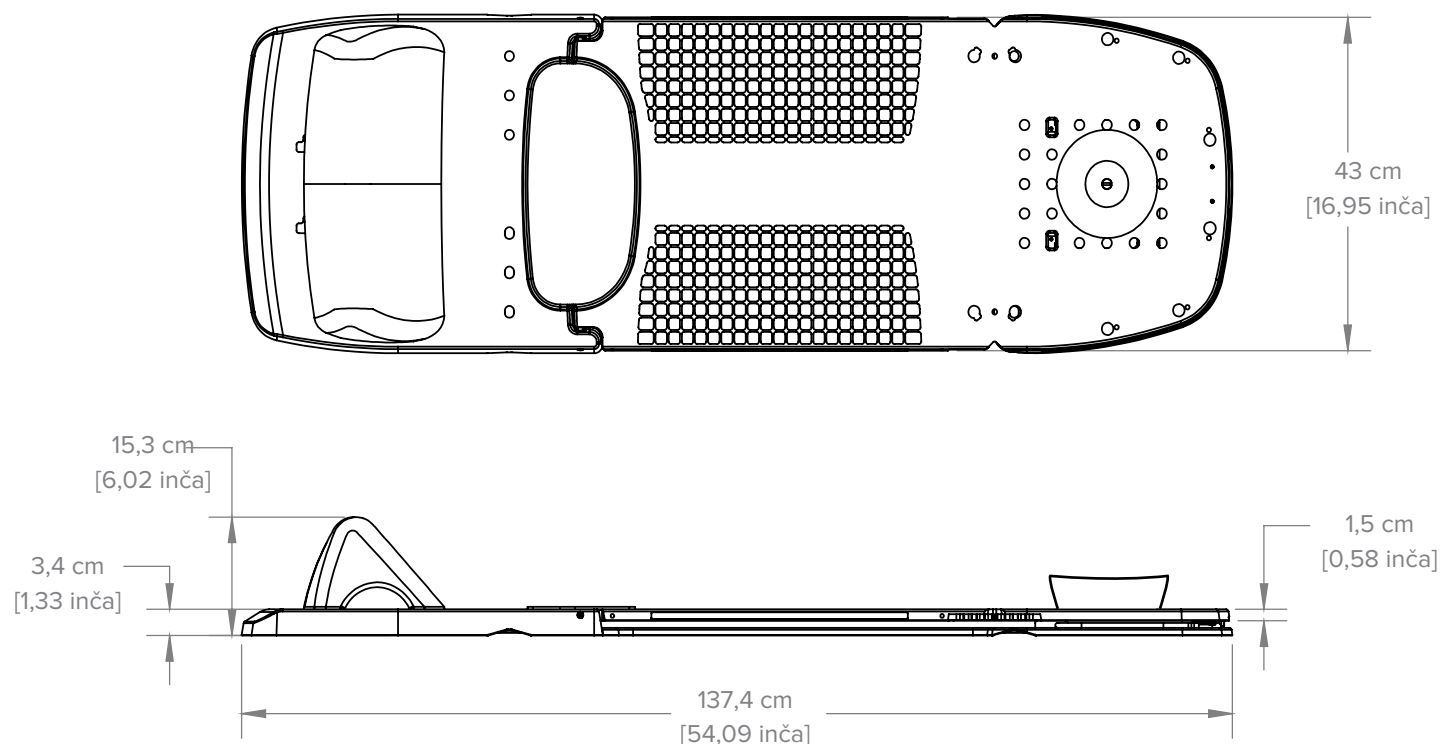

LISTA DELOVA

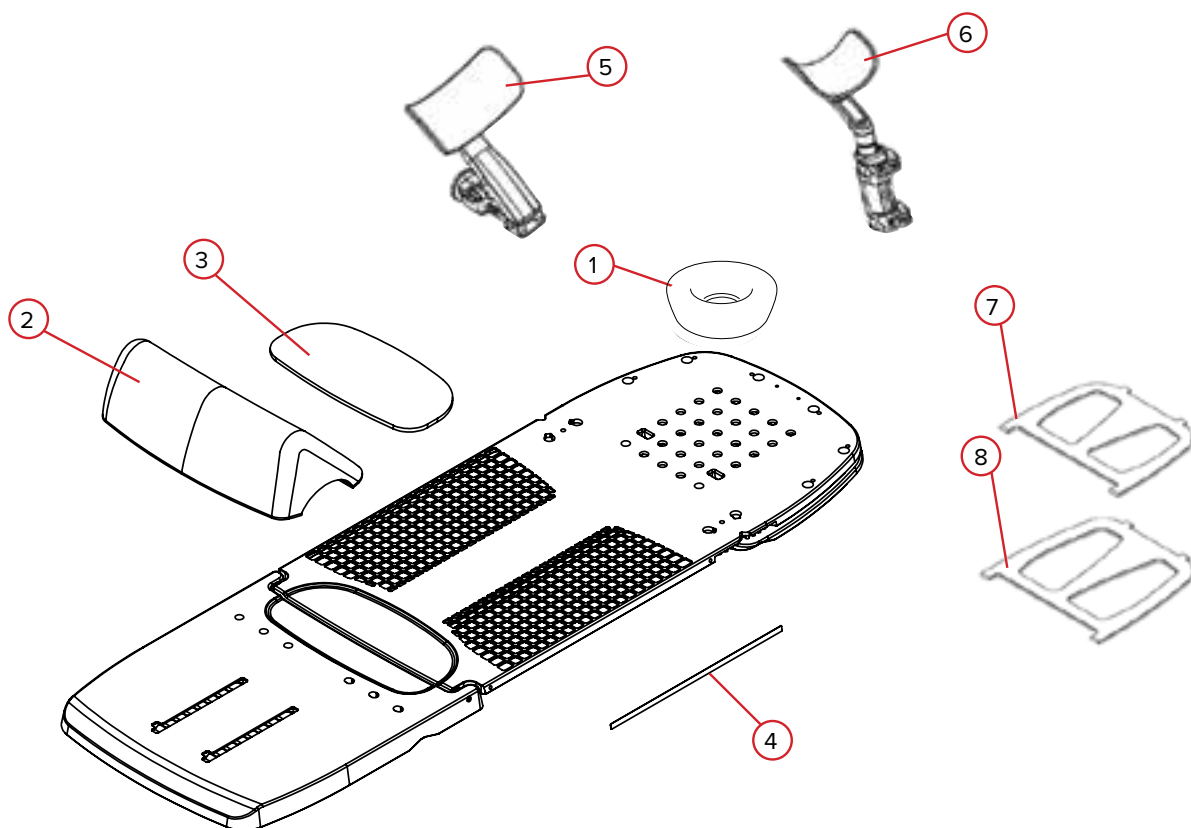

RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01 i RT-4546-02

- 1. RT-4546H – penasti naslon za glavu
- 2. 2004034 – sklop penastog donjeg graničnika
- 3. 2004047 – podloga za trtičnu kost
- 4. 2004392 – bočna etiketa sa oznakama (po 1)

RT-4546AA-01

- 5. 2005353 – penasta podloga čašice za ruku, obmotavanje

RT-4546AW-01

- 6. 2005386 – penasta podloga čašice za zglob, obmotavanje

RT-4546L

- 7. 2004121 – dodatne merdevine, 20 stepeni
- 8. 2004122 – dodatne merdevine, 25 stepeni

LIST ZA PODEŠAVANJE

RT-4546: Access Supine za tretmane dojki i pluća, RT-4546MRI: Access Supine za MR dojki i pluća,
RT-4546-01: Access Supine za tretmane dojki ili RT-4546-02: Access Supine za tretmane dojki i pluća bez mreže

Ime pacijenta:


ID broj pacijenta:

Podešavanje izvršio:

Lekar:

Datum:

Komentari:

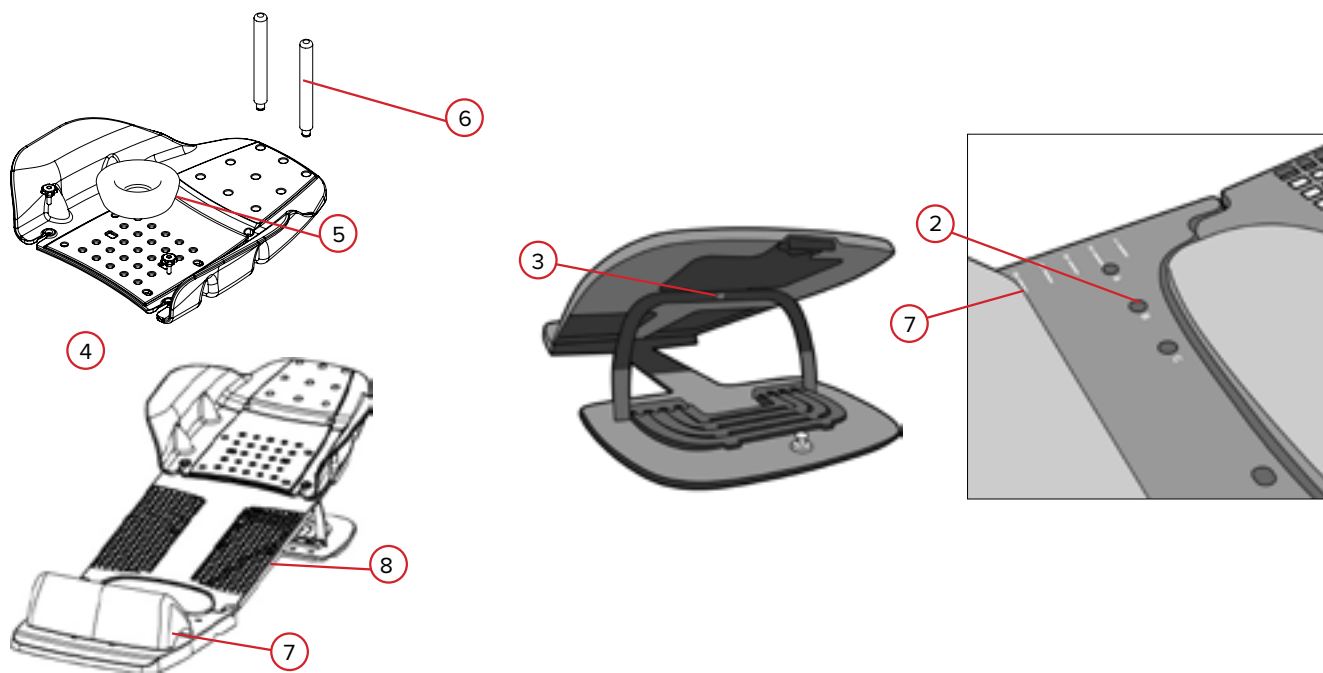

- Indeksirano za sto za simulaciju ili lečenje? **Da** **Ne** Ako jeste, podešavanje indeksnih zarezova
- Lokacija klinova lokalizacione šipke (izaberite jednu opciju): **A** **B** **C**
- Ugao površine za pacijenta (izaberite jednu opciju): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Koristi se i ArmShuttle: **Da** **Ne**
- Lokacija naslona za glavu (broj 1–28):
- Lokacija držača za ruke (izaberite one koje se koriste)
A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **NE KORISTI SE NIJEDAN**
- Da li se koristi donji graničnik? **Da** **Ne** Ako se koristi, koje mu je podešavanje? (broj 1–8)
- Lokacija lasera za bočno označavanje:

LIST ZA PODEŠAVANJE

RT-4546: Access Supine za tretmane dojki i pluća, RT-4546MRI: Access Supine za MR dojki i pluća,
RT-4546-01: Access Supine za tretmane dojki ili RT-4546-02: Access Supine za tretmane dojki i pluća bez mreže

Ime pacijenta:

ID broj pacijenta:

Podešavanje izvršio:

Lekar:

Datum:

Komentari:



1. Indeksirano za sto za simulaciju ili lečenje? **Da** **Ne** Ako jeste, podešavanje indeksnih zareza
2. Lokacija klinova lokalizacione šipke (izaberite jednu opciju): **A** **B** **C**
3. Ugao površine za pacijenta (izaberite jednu opciju): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
4. Lokacija i ugao oslonaca za ruke (izaberite jednu opciju) –
- | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Leva strana pacijenta: | X | Y | -30° | -15° | 0° | 15° | 30° |
| Desna strana pacijenta: | X | Y | -30° | -15° | 0° | 15° | 30° |
5. Visina oslonaca za ruke (broj 1–8): Leva strana pacijenta Desna strana pacijenta
6. Dužina oslonaca za ruke (izaberite jednu opciju): Leva strana pacijenta: **A** **B** **C** Desna strana pacijenta: **A** **B** **C**
7. Položaj oslonaca za zglobove (slovo od A do H): Leva strana pacijenta Desna strana pacijenta
8. Ugao oslonaca za zglobove:
- | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leva strana pacijenta: | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |
| Desna strana pacijenta: | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |
9. Visina oslonaca za zglobove (slova od W do Z): Leva strana pacijenta Desna strana pacijenta



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com